



Verein für medizinische Qualitätskontrolle
Association pour le contrôle de Qualité médical
Associazione per il controllo di qualità medico


K50 per Exdia TRF Plus Analyser

Troponina I, NT-proBNP e D-dimeri

Per ciascuna delle tre analisi (D-dimeri, troponina, NT-proBNP) servono 80 microlitri di campione.

Consigliamo di pipettare sulla cartuccia test il volume di campione necessario usando una pipetta automatica.

In assenza di pipetta automatica, nell'imballaggio del test si trovano pipette di plastica con cui è possibile prelevare 80 μ l.

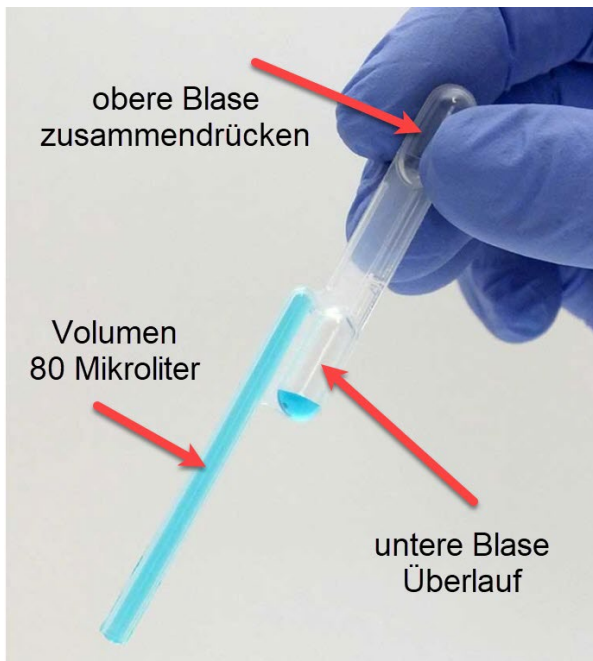

Premere l'ampolla superiore

Volume di 80 μ l

Ampolla inferiore per l'eccesso

IMPORTANTE

Il tubicino in plastica della pipetta, che viene riempito con 80 μ l di campione, deve essere riempito completamente.

L'ampolla inferiore è per l'eccesso aspirato e **non deve essere riempita!**