



Rapporto del controllo circolare

2025 - 2

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>).

I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto:
B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a) Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b) Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c) Valori di riferimento, determinati da analisi
- d) Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e) Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (ux) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$$ux = (\text{valore assegnato}/100) \cdot 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} \cdot \text{coeff. variazione (CV)\%}$$

ux ha la stessa unità di misura del valore assegnato

ux è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: valore assegnato · CV%/100)

Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, externe Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata ux del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:

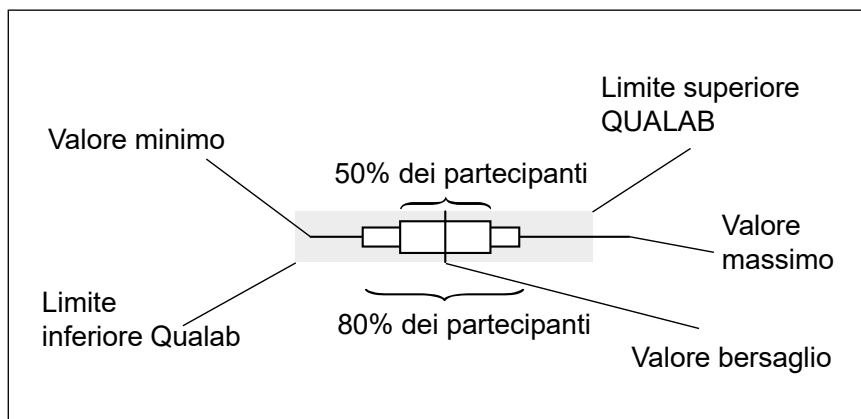

Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:


- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.

Zurigo, 7.7.2025

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch


Quick OA

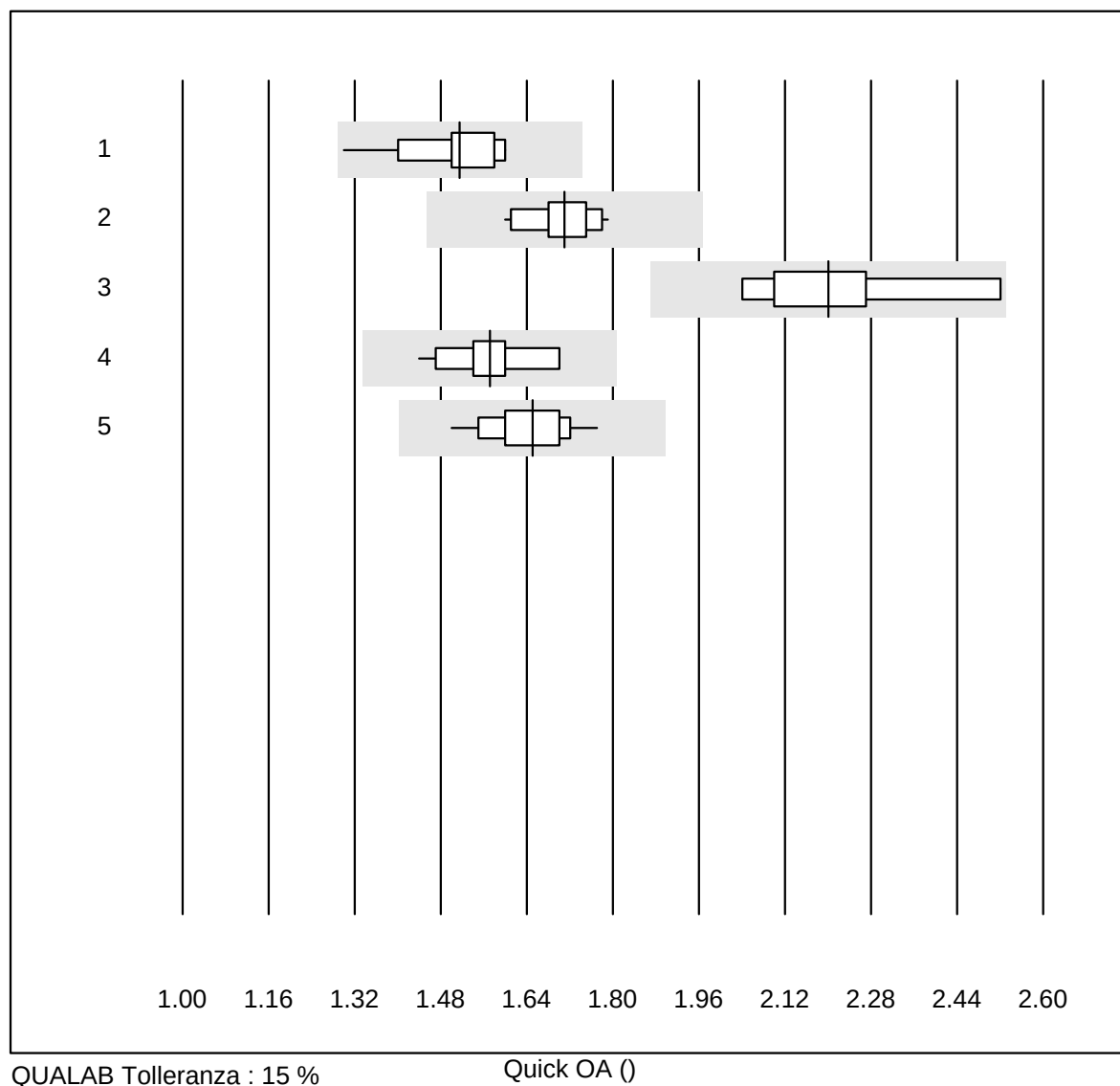

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Innovin	15	100.0	0.0	0.0	1.52	5.4	e
2 Neoplastin R	17	100.0	0.0	0.0	1.71	3.1	e
3 Neoplastin Plus	9	100.0	0.0	0.0	2.20	7.8	e*
4 STA-NeoPTimal	11	100.0	0.0	0.0	1.57	5.1	e
5 Recombiplastina 2G	18	100.0	0.0	0.0	1.65	4.0	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Fibrinogeno OA

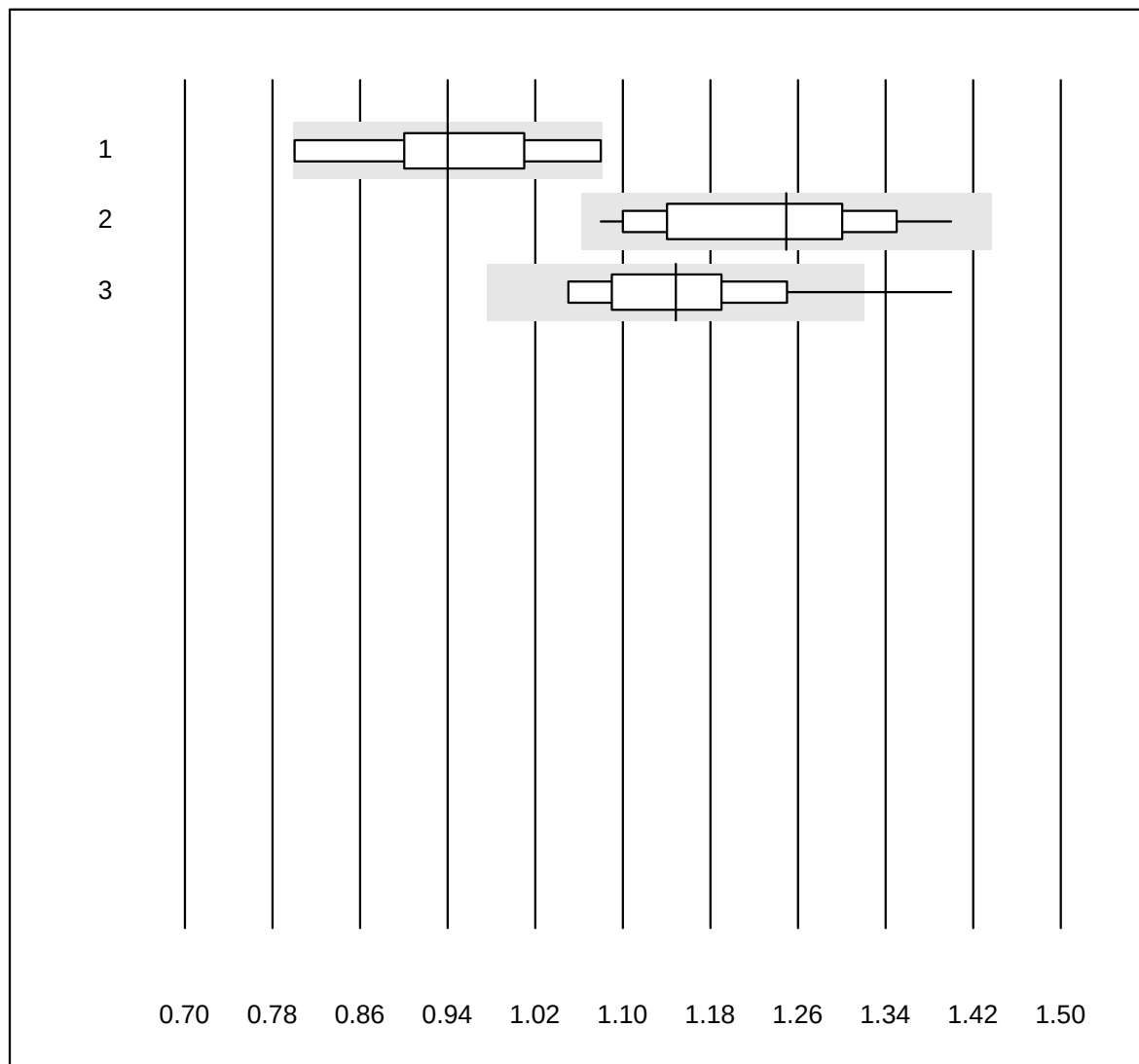


QUALAB Tolleranza : 15 %

Fibrinogeno OA (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Trombina Siemens	9	100.0	0.0	0.0	0.94	9.7	a
2 Stago/STA	24	100.0	0.0	0.0	1.25	7.6	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	16	93.7	6.3	0.0	1.15	7.7	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

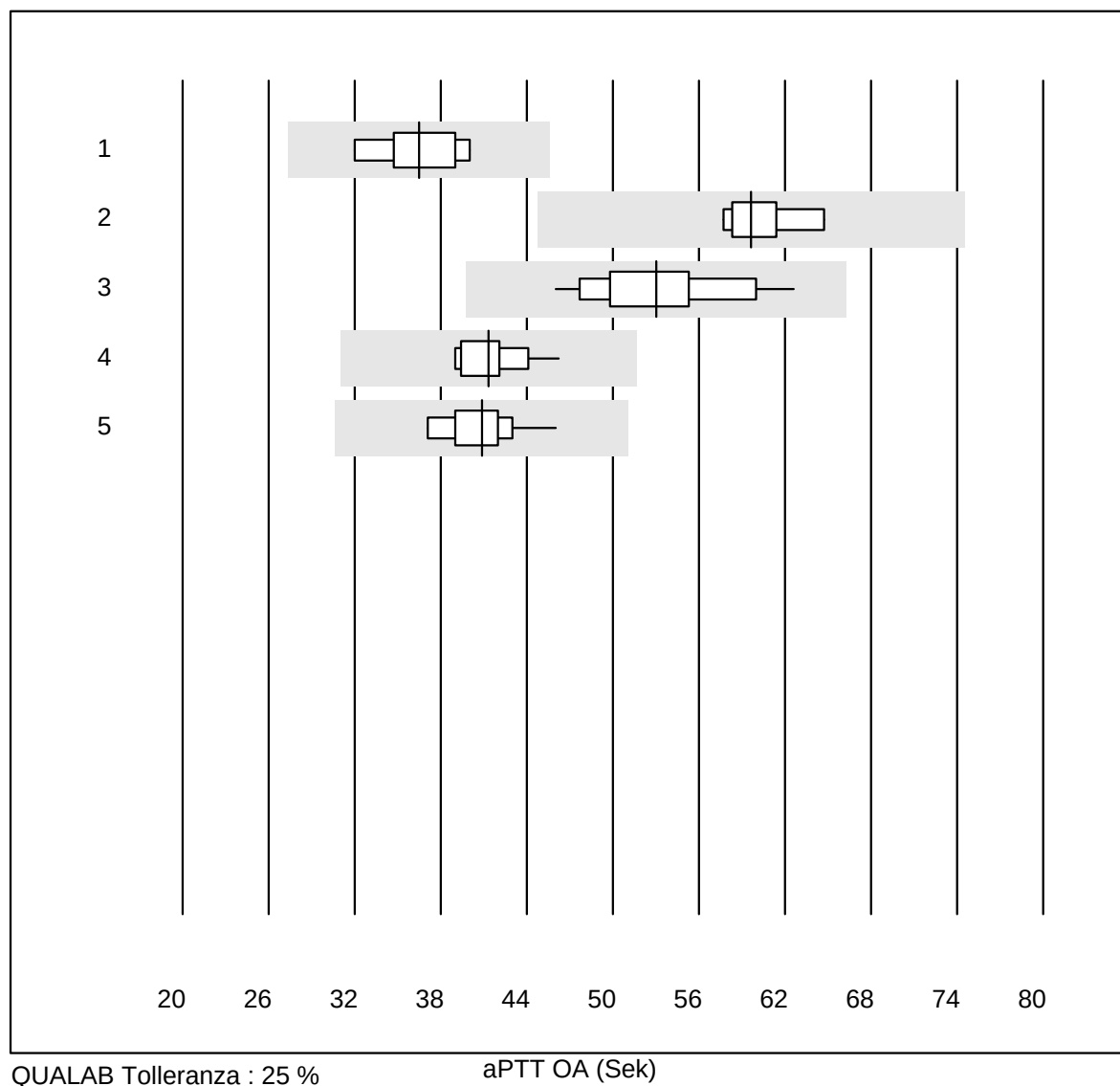
aPTT OA

QUALAB Tolleranza : 25 %

aPTT OA (Sek)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	36.5	8.0	e*
2 Pathromtin SL	6	100.0	0.0	0.0	59.7	4.2	e
3 Stago/STA	23	100.0	0.0	0.0	53.0	8.0	e
4 aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	41.3	5.5	e
5 altri metodi	10	100.0	0.0	0.0	40.9	6.0	e

INR CoaguChek

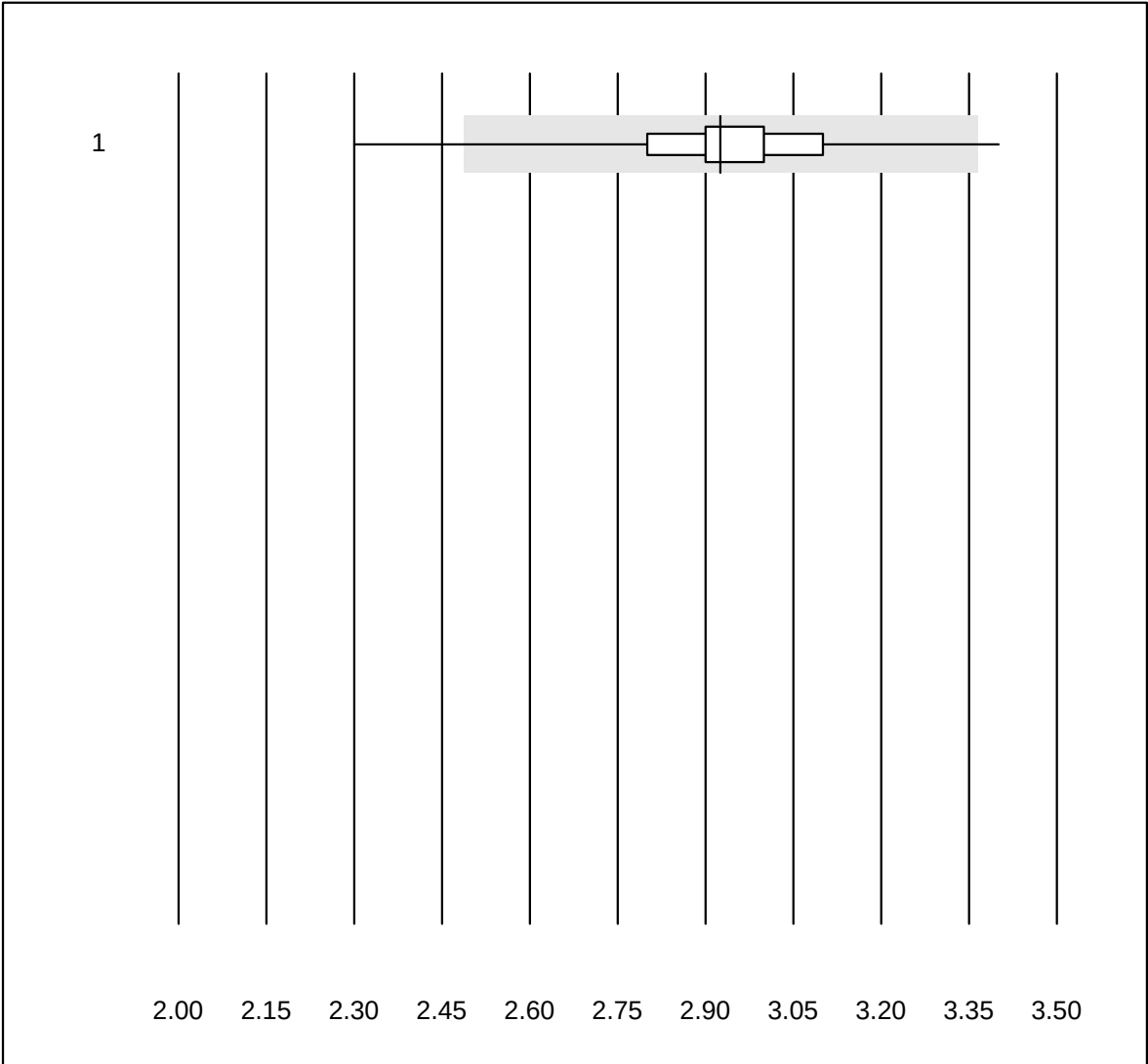


QUALAB Tolleranza : 15 %

INR CoaguChek ()


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	CoaguChek Pro II	953	98.3	0.4	1.3	2.9	4.1	e

Quick N

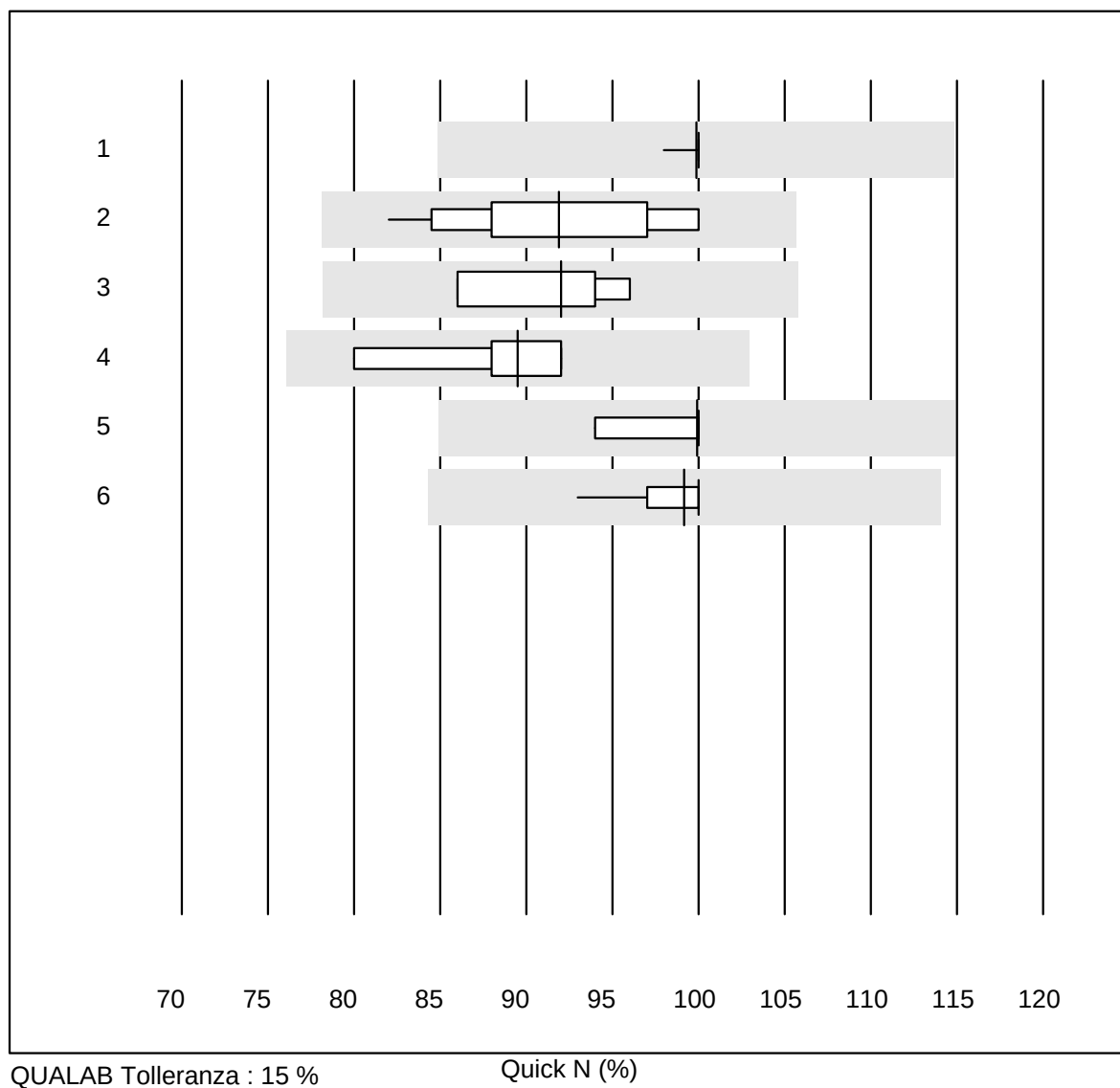


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Innovin	14	100.0	0.0	0.0	100	0.5	e
2 Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	92	6.4	e
3 Neoplastin Plus	4	100.0	0.0	0.0	92	4.8	e*
4 STA-NeoPTimal	6	100.0	0.0	0.0	90	5.0	e*
5 Recombiplastina 2G	10	100.0	0.0	0.0	100	1.9	e
6 altri metodi	12	100.0	0.0	0.0	99	2.1	e

Fibrinogeno N

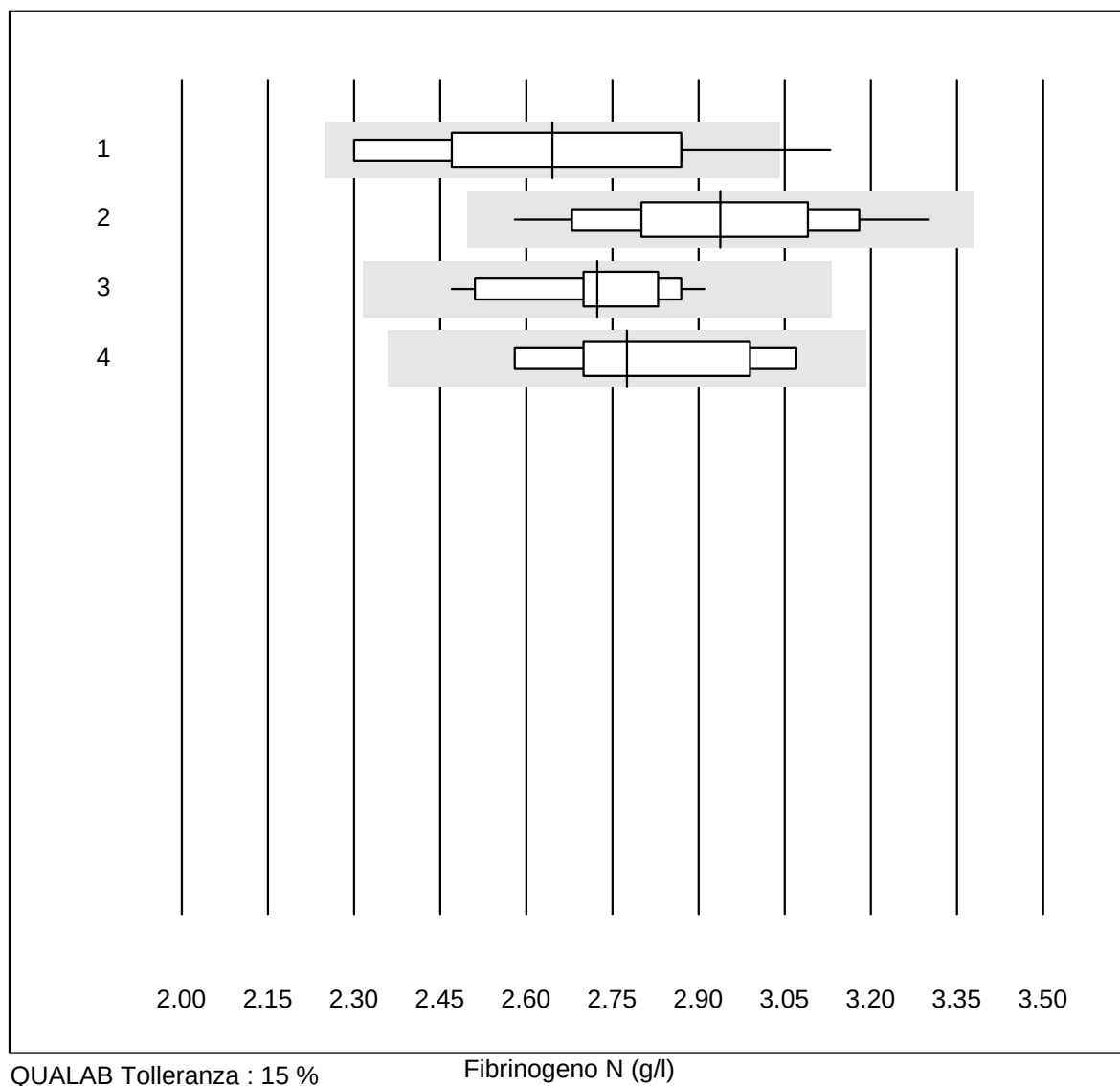


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Trombina Siemens	10	90.0	10.0	0.0	2.65	9.3	e*
2 Stago/STA	19	100.0	0.0	0.0	2.94	6.1	e
3 Fibrinogen Q.F.A.	15	100.0	0.0	0.0	2.72	4.6	e
4 Fib Clauss (IL)	6	100.0	0.0	0.0	2.78	6.5	e*


Fattore V

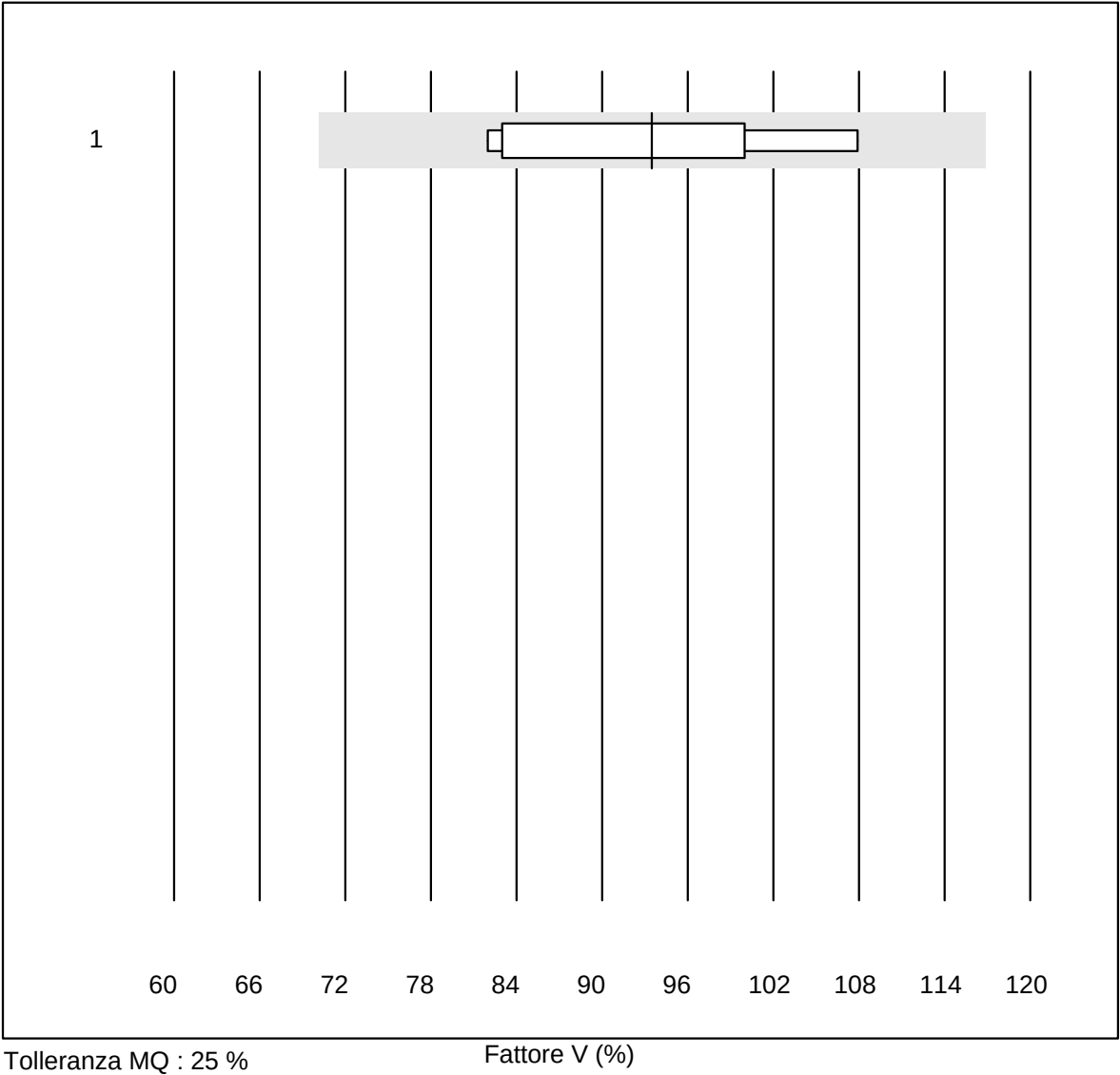

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	8	100.0	0.0	0.0	93.5	11.0	e*

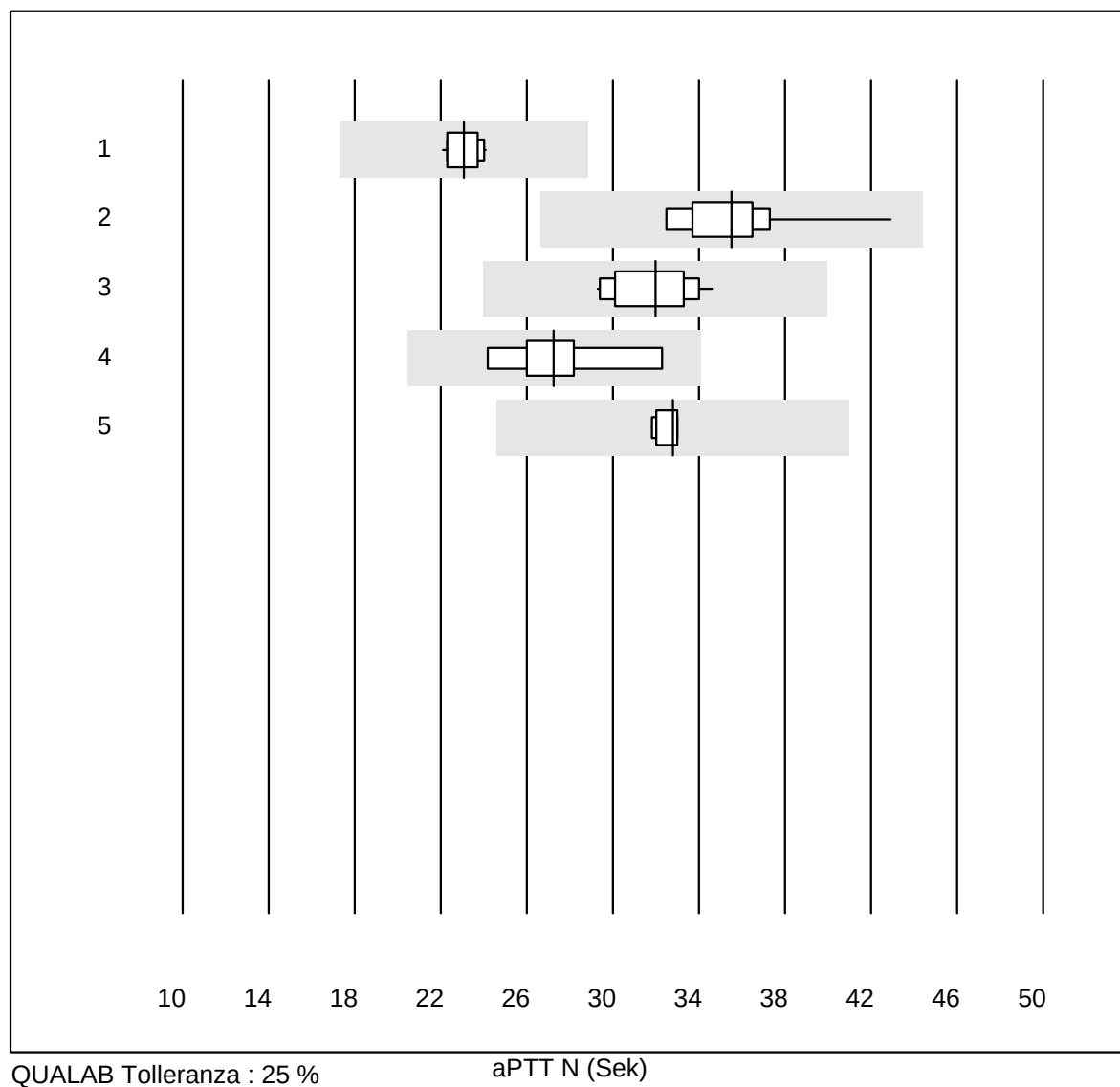
aPTT N

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	23.1	3.0	e
2 Pathromtin SL	10	100.0	0.0	0.0	35.5	8.5	e
3 Stago/STA	19	100.0	0.0	0.0	32.0	5.6	e
4 aPTT-SP	8	100.0	0.0	0.0	27.3	8.9	e*
5 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	32.8	1.6	e

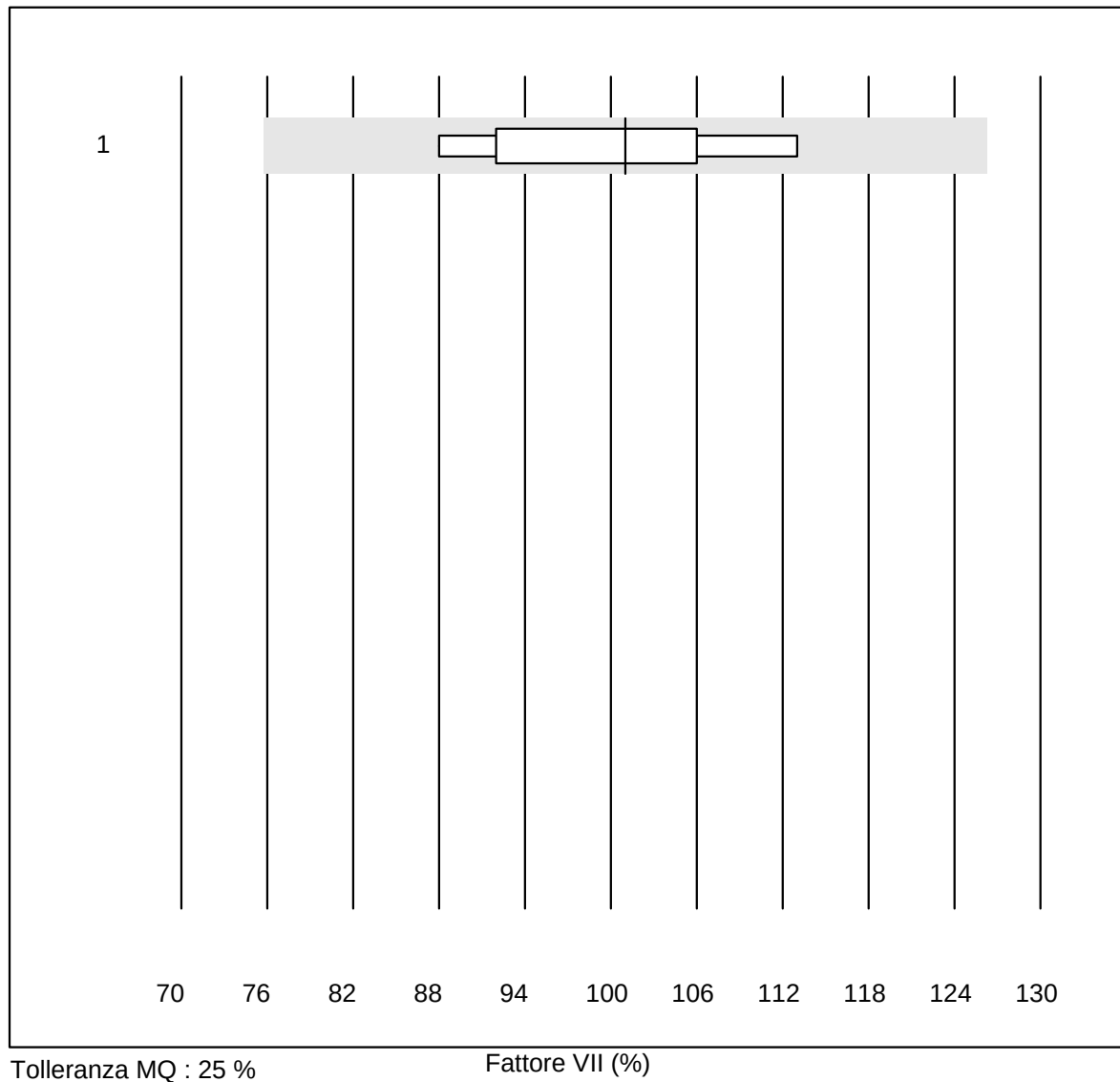Fattore VII

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	101.0	10.2	e*

Tempo di trombina N

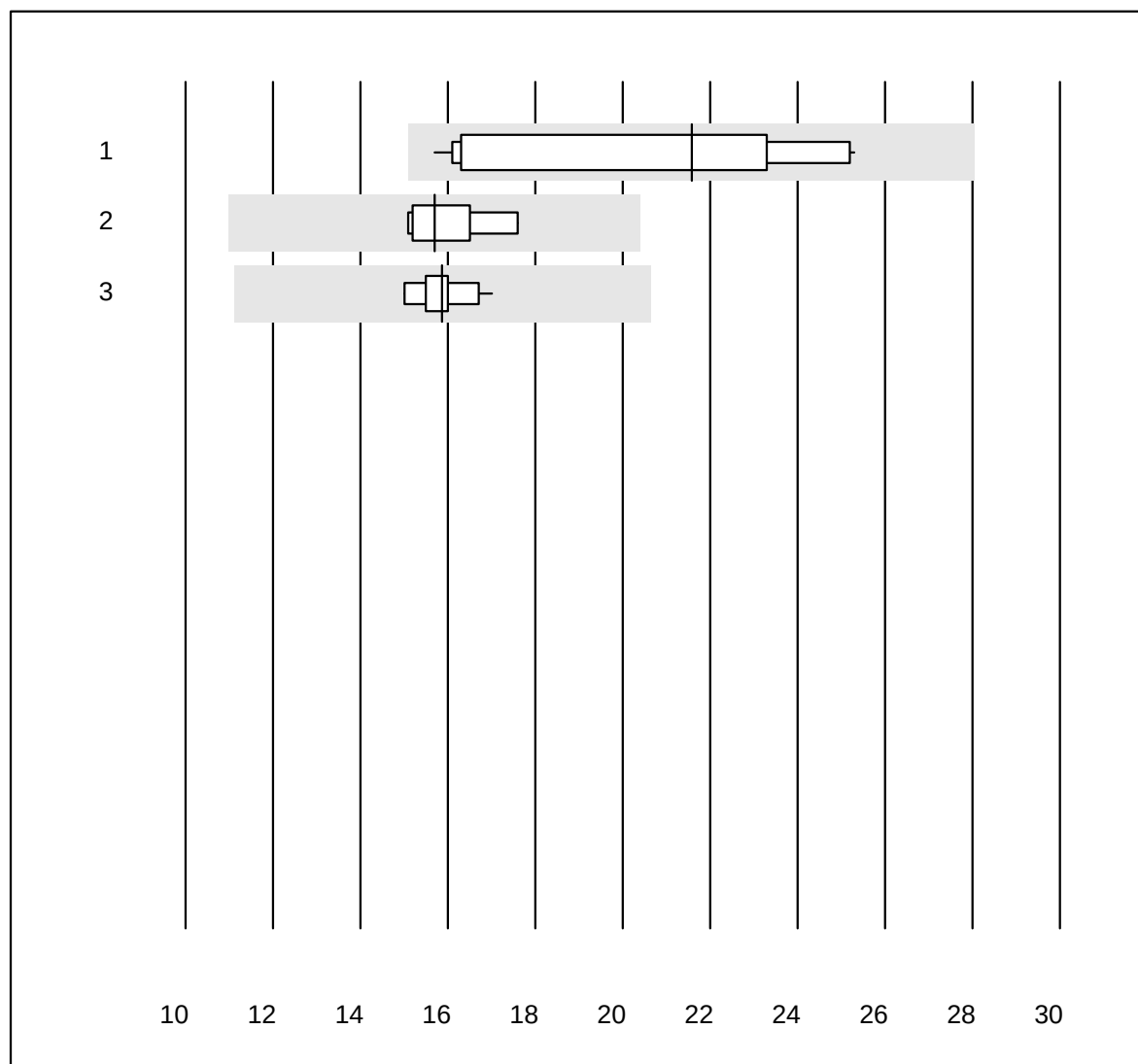


Tolleranza MQ : 30 %

Tempo di trombina N (Sek)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ACL	12	100.0	0.0	0.0	22	16.3	e*
2 Stago/STA	6	100.0	0.0	0.0	16	6.0	e
3 altri metodi	10	100.0	0.0	0.0	16	3.8	e

Quick H

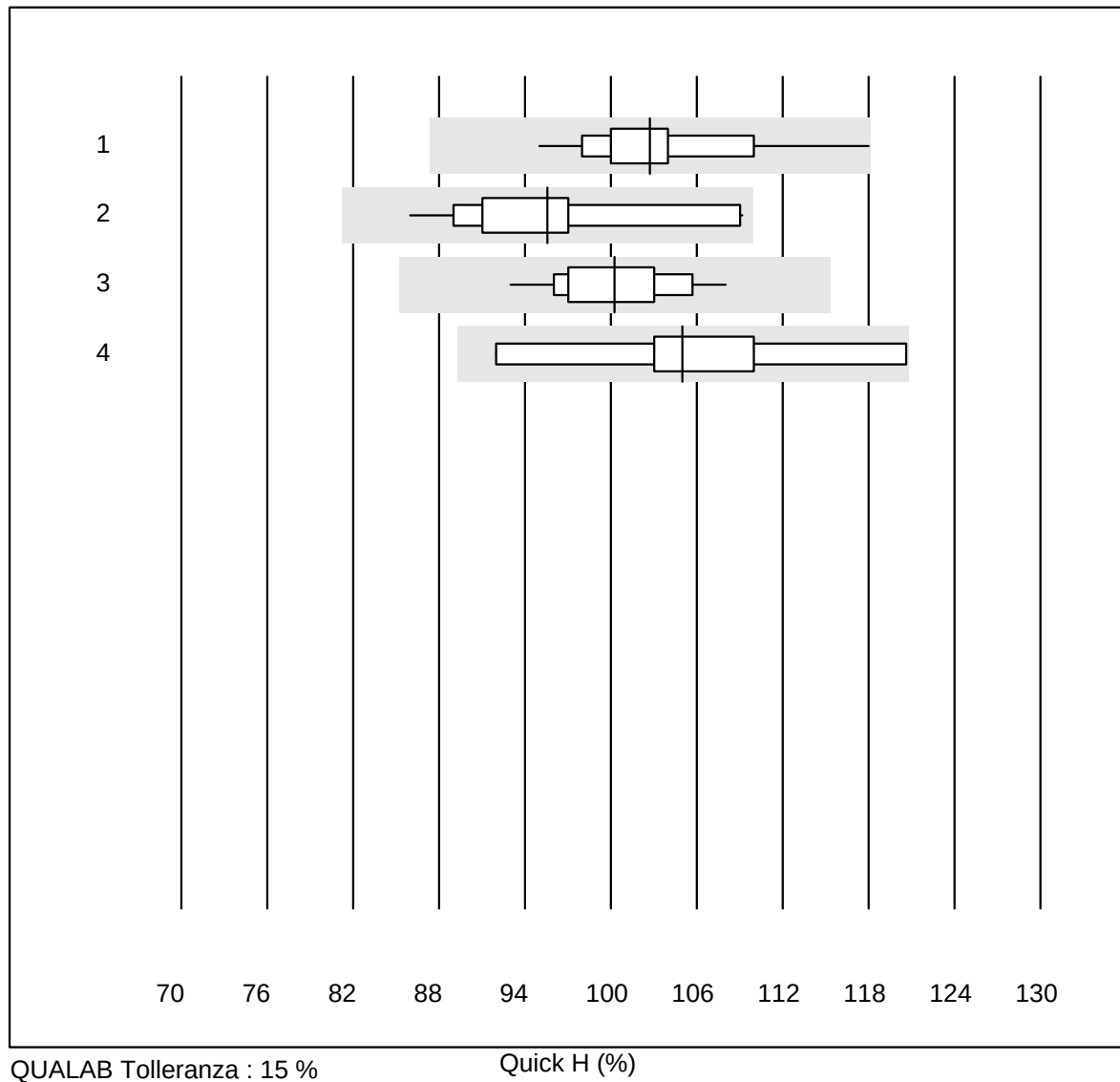

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Innovin	13	100.0	0.0	0.0	103	5.7	e
2 Neoplastin R	14	100.0	0.0	0.0	96	7.1	e*
3 Recombiplastina 2G	14	100.0	0.0	0.0	100	4.0	e
4 altri metodi	9	100.0	0.0	0.0	105	7.4	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

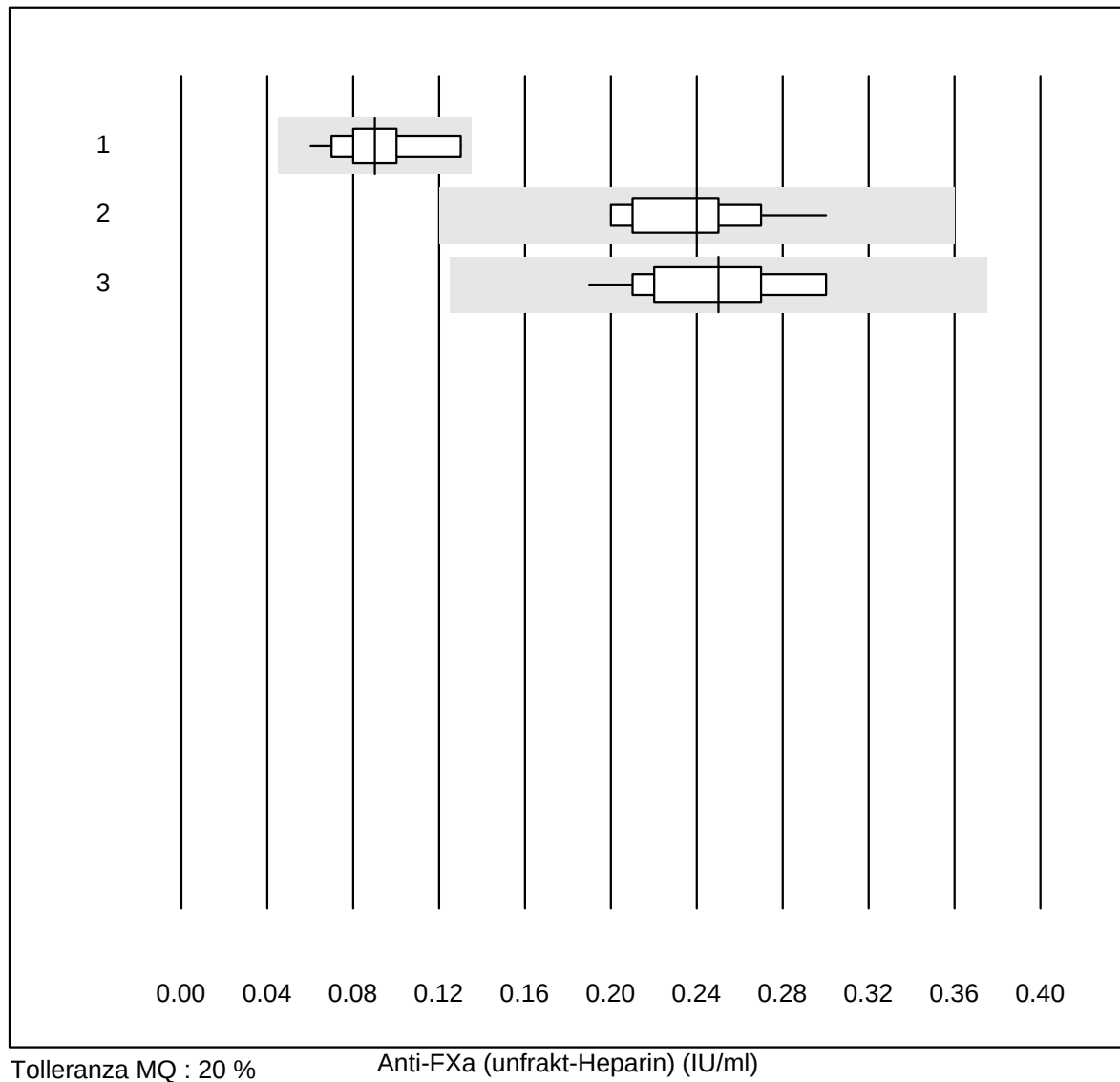
Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (unfrakt-Heparin) (IU/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Stago/STA	12	100.0	0.0	0.0	0.09	23.1	a
2 ACL	20	100.0	0.0	0.0	0.24	11.7	a
3 altri metodi	25	100.0	0.0	0.0	0.25	13.7	a

Fibrinogeno H

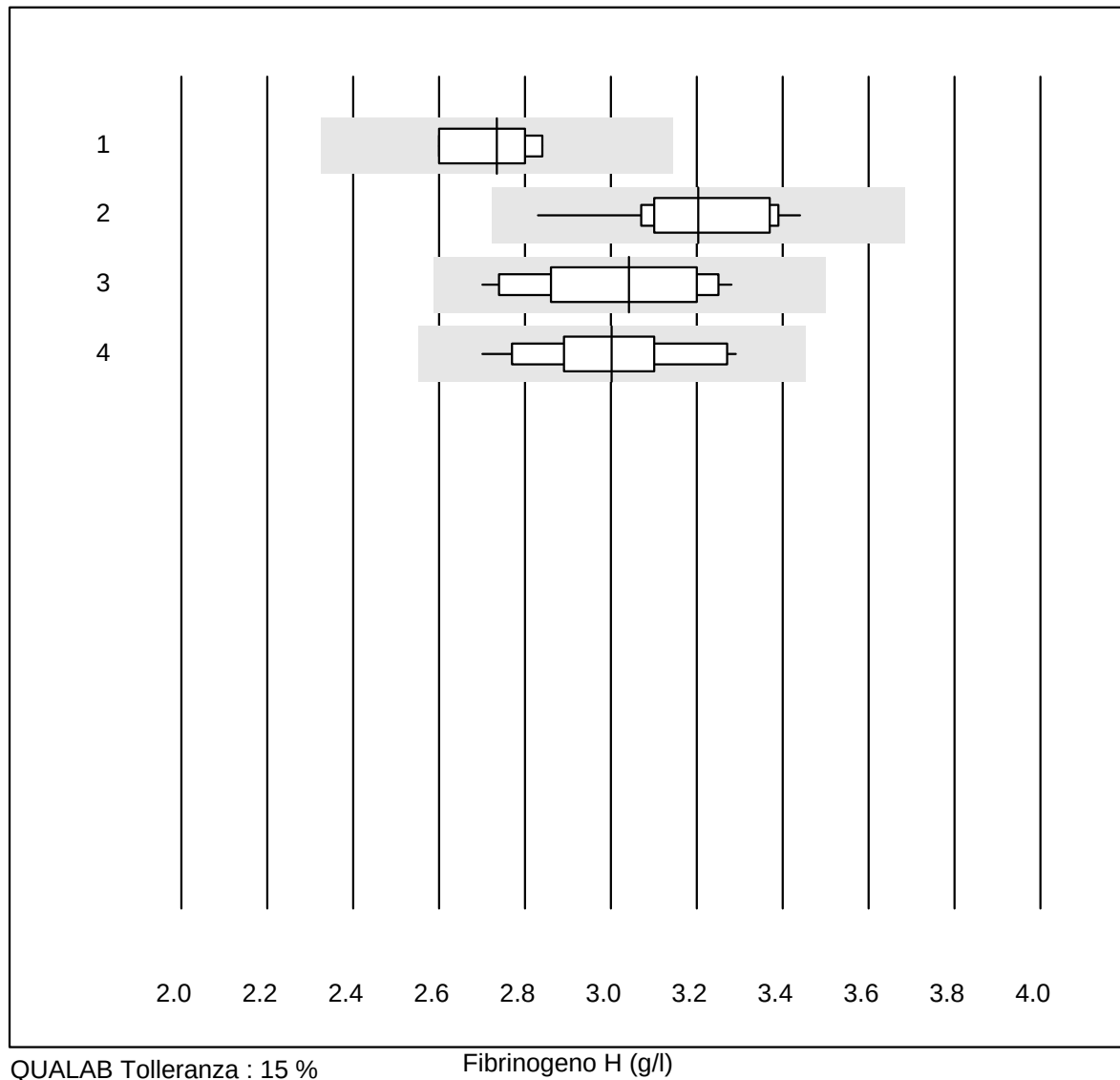


QUALAB Tolleranza : 15 %

Fibrinogeno H (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Trombina Siemens	4	100.0	0.0	0.0	2.74	4.1	e*
2	Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	3.20	5.0	e
3	Fibrinogen Q.F.A.	13	100.0	0.0	0.0	3.04	6.6	e*
4	altri metodi	12	100.0	0.0	0.0	3.00	6.2	e


3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

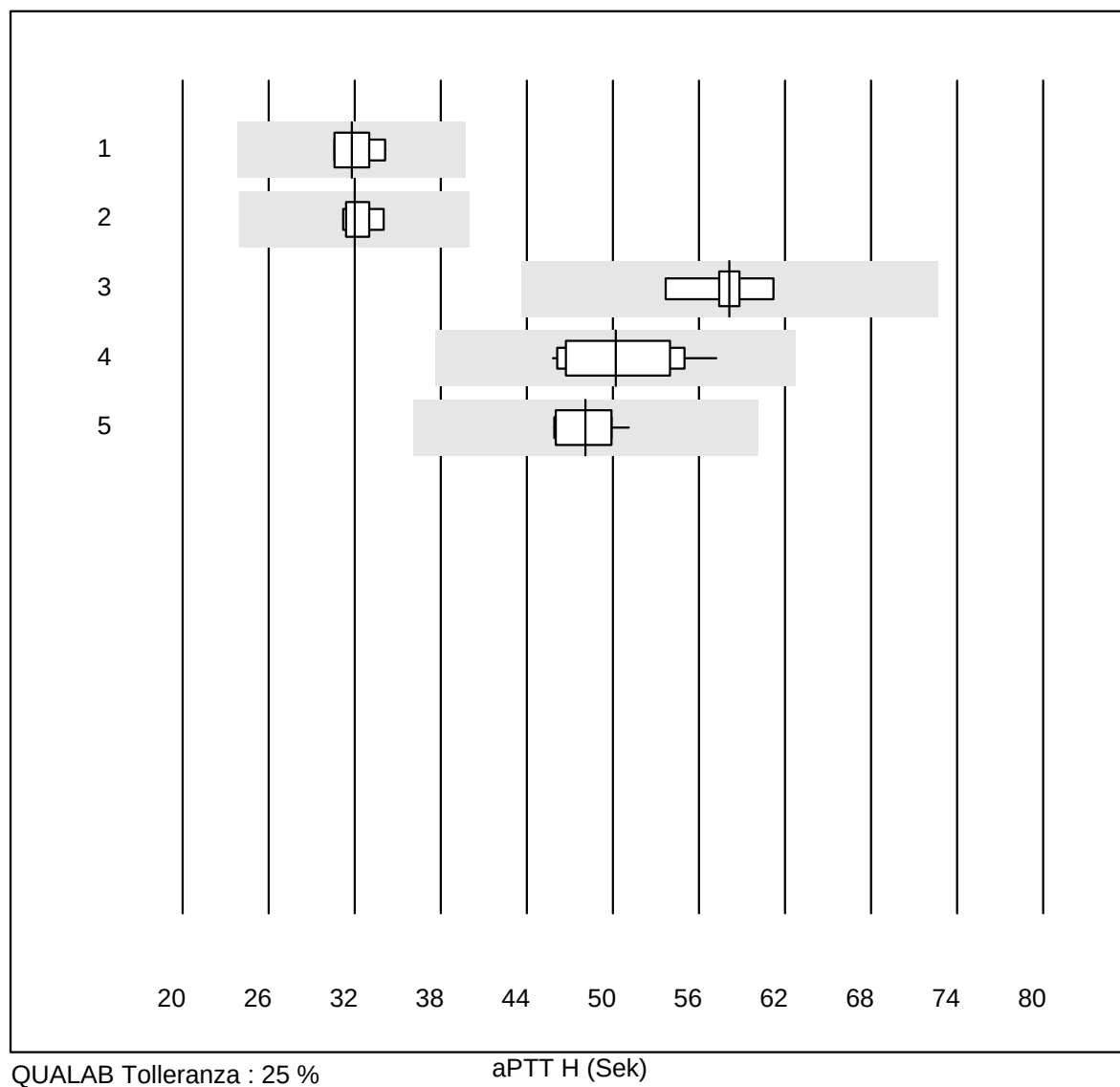aPTT H

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Actin FS	4	100.0	0.0	0.0	31.8	5.5	e
2 Actin FSL	7	100.0	0.0	0.0	32.0	3.0	e
3 Pathromtin SL	9	100.0	0.0	0.0	58.1	3.8	e
4 Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	50.2	8.2	e
5 aPTT-SP	10	100.0	0.0	0.0	48.1	4.0	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Tempo di trombina H

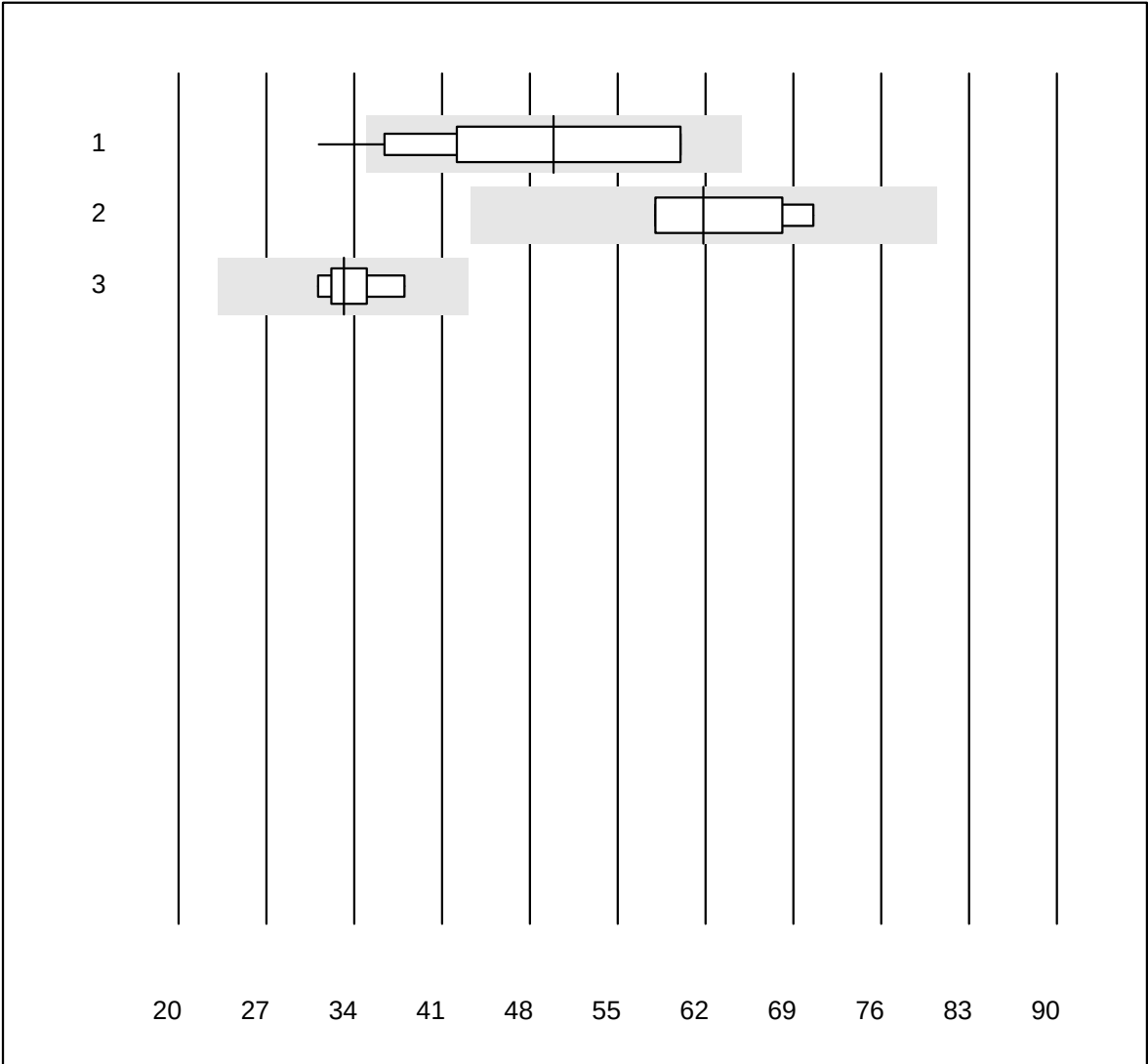


Tolleranza MQ : 30 %

Tempo di trombina H (Sek)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ACL	11	90.9	9.1	0.0	50	21.5	e*
2	Stago/STA	6	66.7	0.0	33.3	62	8.3	e
3	altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	33	7.2	e

D-Dimeri

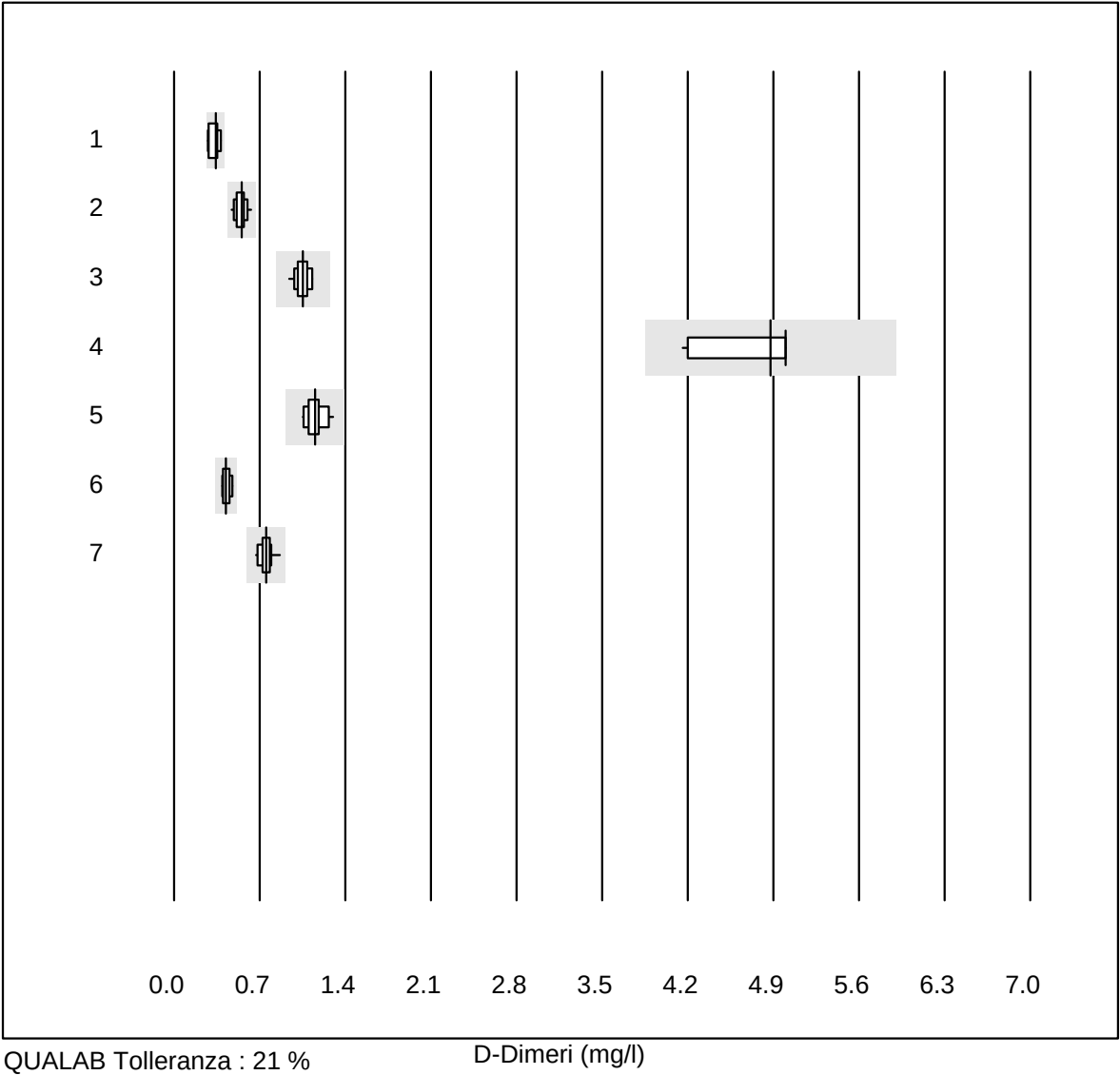


QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimeri (mg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche (Zitratplasma)	9	88.9	0.0	11.1	0.34	11.7	e*
2	STA Liatest	17	100.0	0.0	0.0	0.55	7.7	e
3	Siemens	16	100.0	0.0	0.0	1.05	5.3	e
4	Pathfast	20	95.0	0.0	5.0	4.88	6.0	e
5	ACL	14	100.0	0.0	0.0	1.15	6.6	e
6	AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	0.42	7.3	e*
7	VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	0.75	6.5	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

D-Dimeri Triage

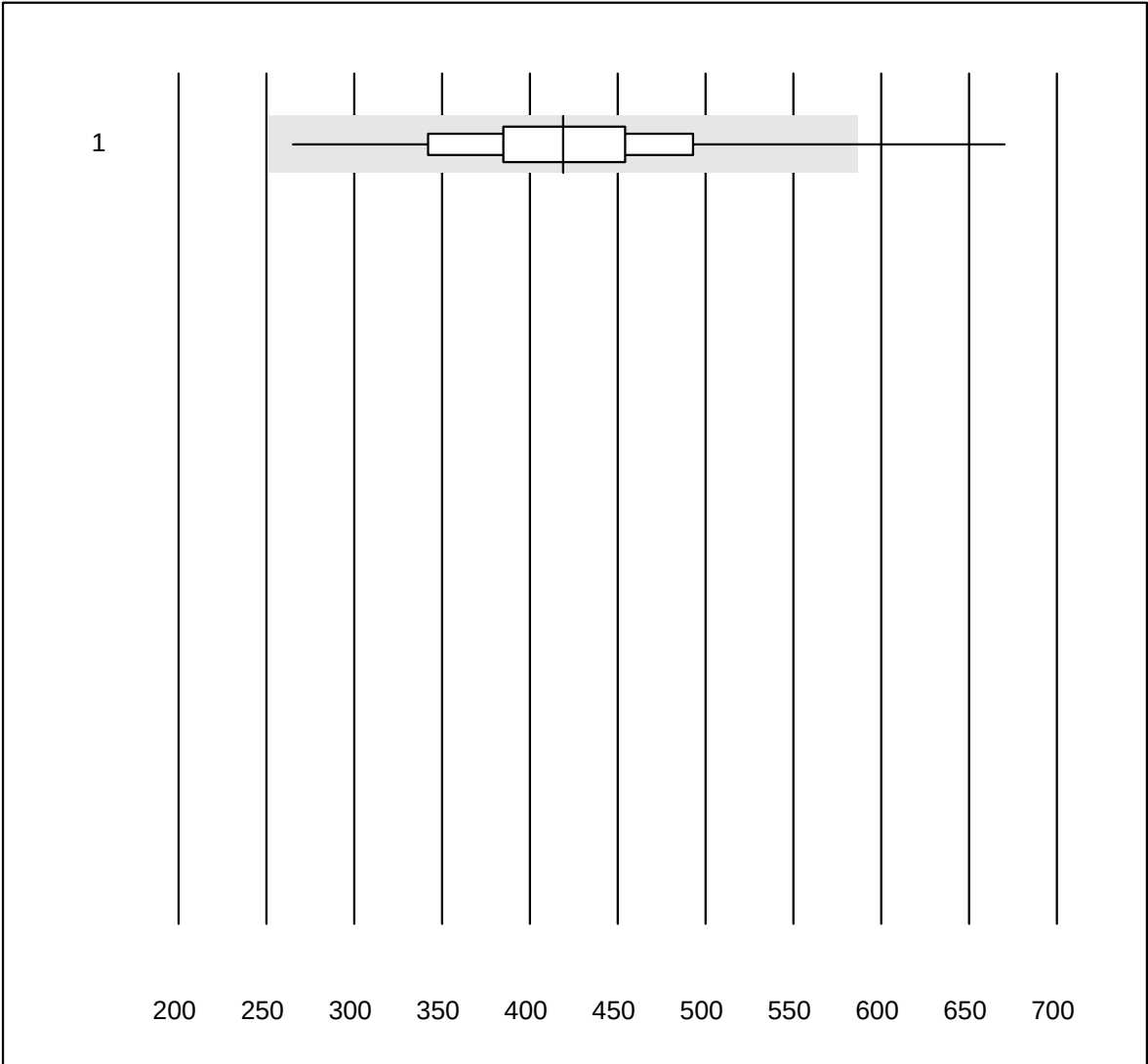


QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimeri Triage (ng/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	371	96.8	0.5	2.7	419.00	14.4	a

D-Dimeri qn AFIAS

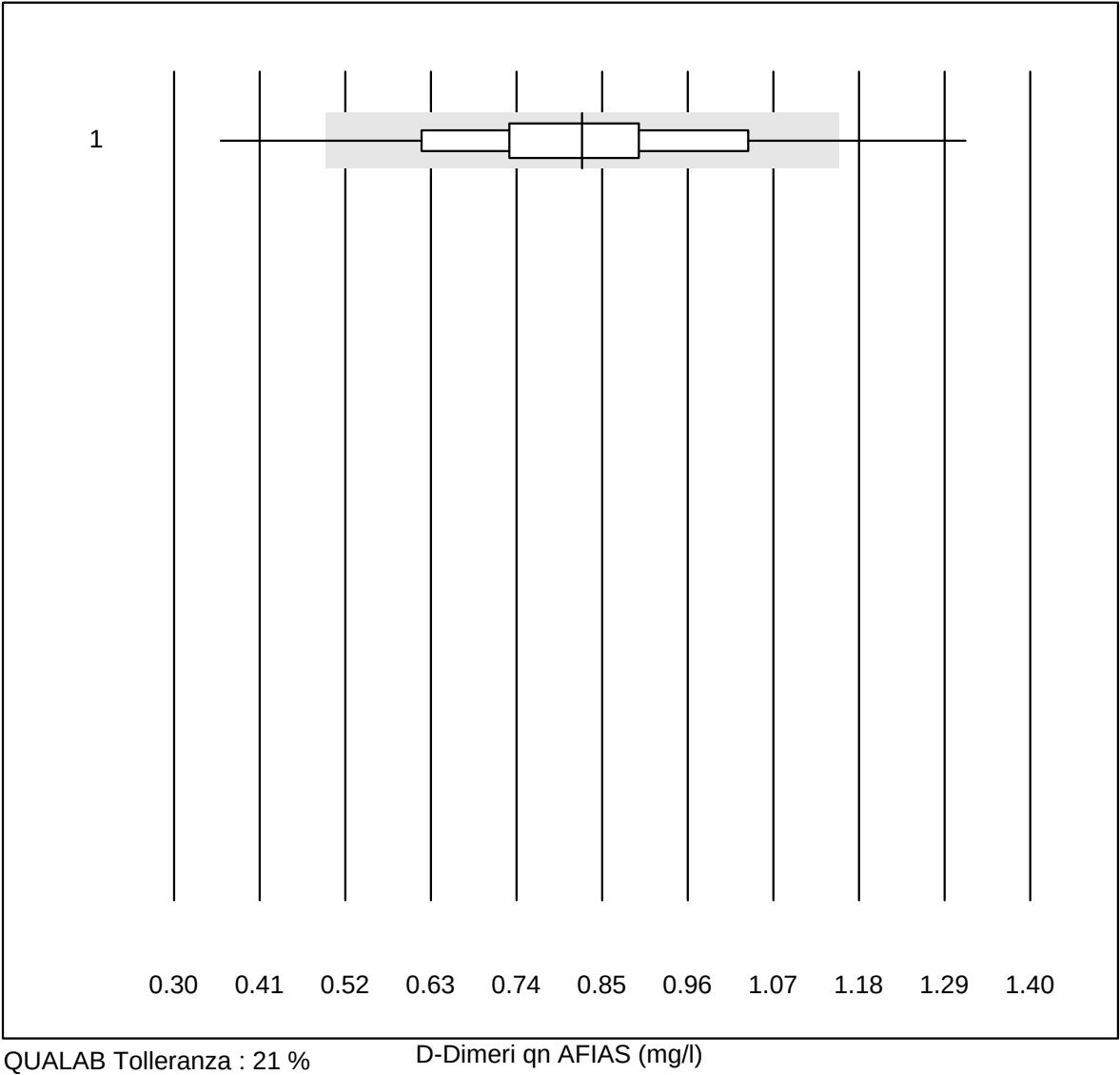


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	619	93.2	5.0	1.8	0.82	19.2	a

CoaguChek APTT




QUALAB Tolleranza : 25 %

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CoaguChek Pro II	8	87.5	12.5	0.0	94.5	12.6	e*

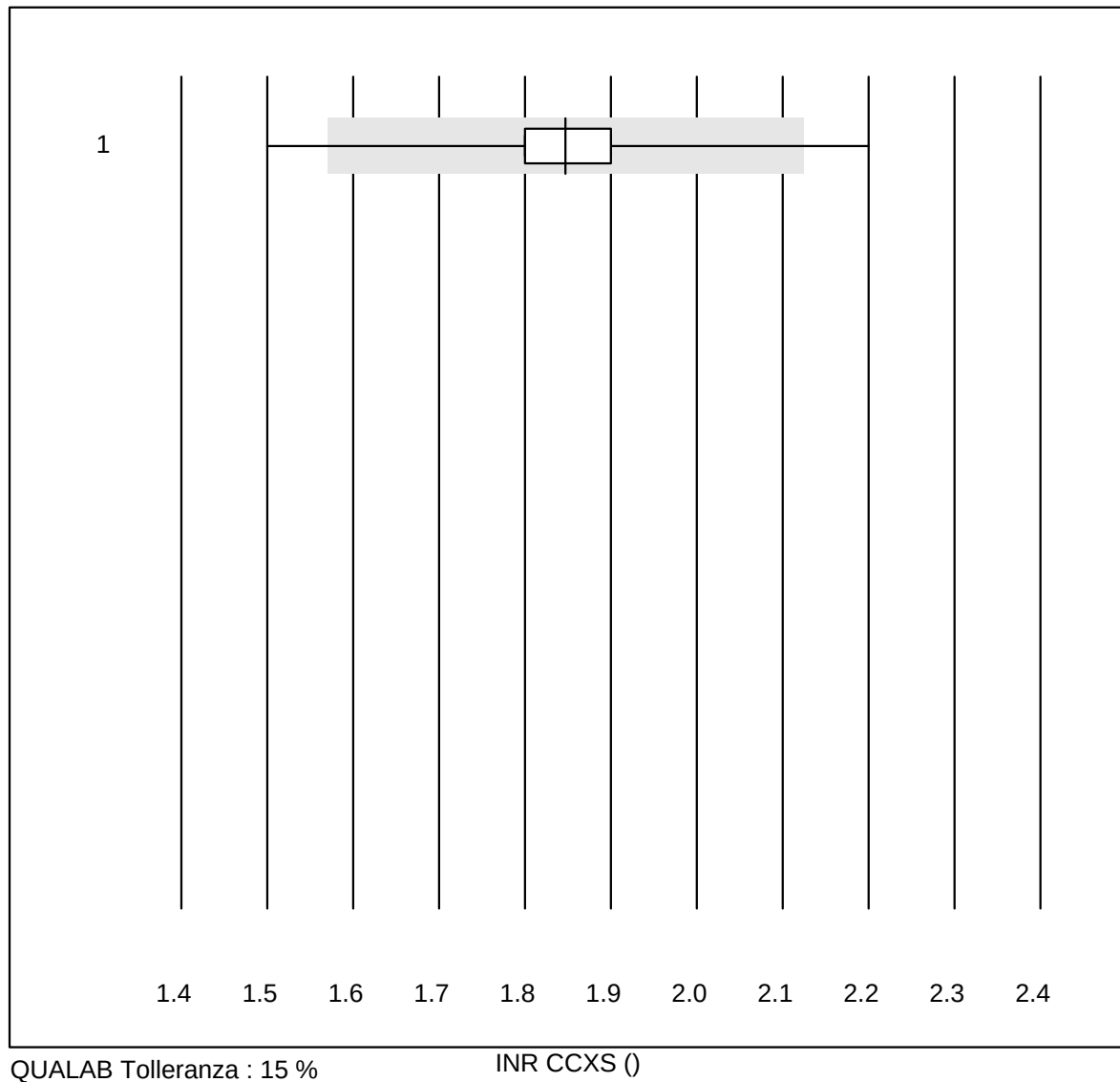
INR CCXS

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 CoaguChek XS	1241	99.0	0.2	0.8	1.8	4.0	e

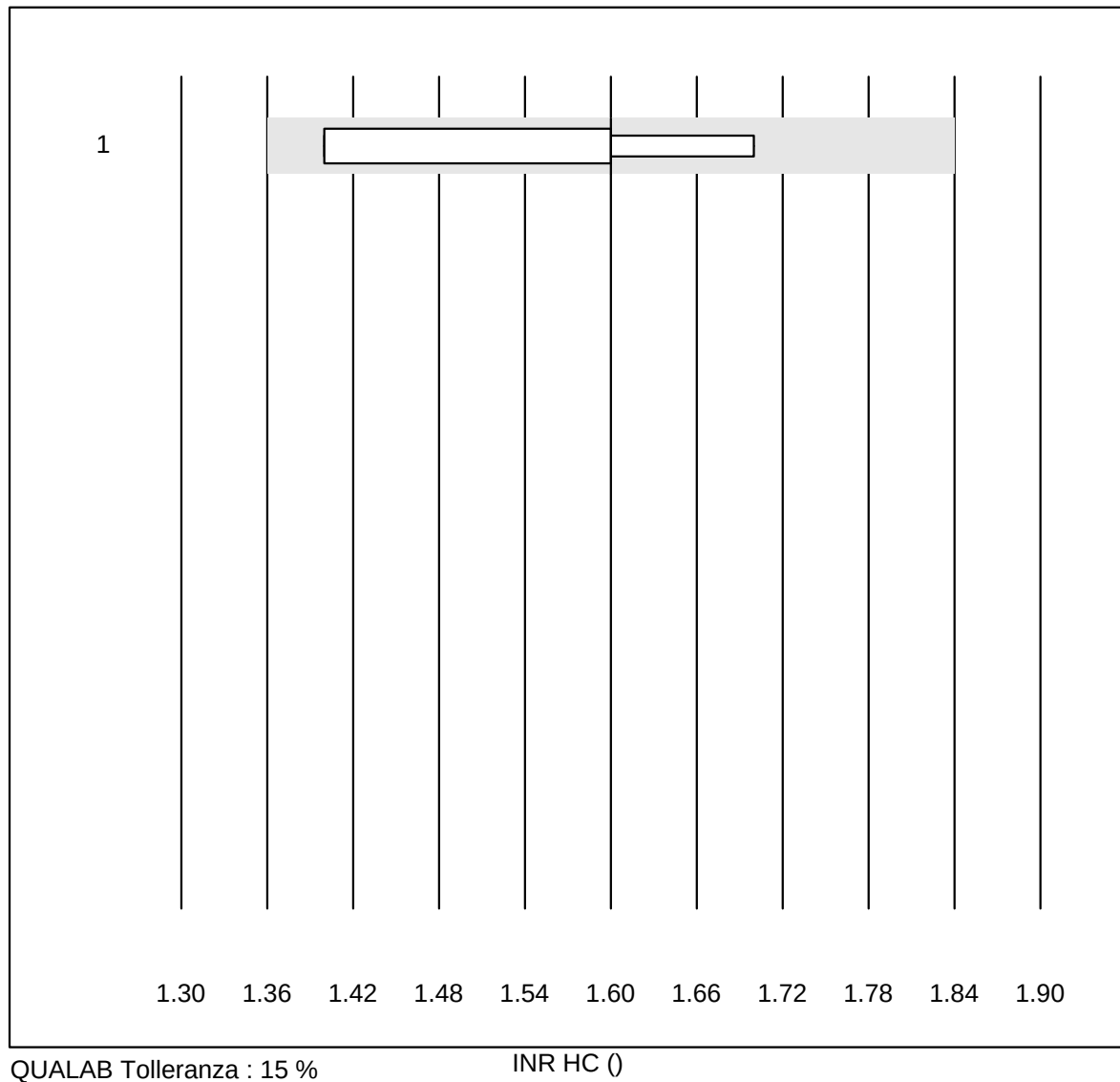INR HC

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Hemochron j.	5	80.0	0.0	20.0	1.6	8.0	e*


INR MI

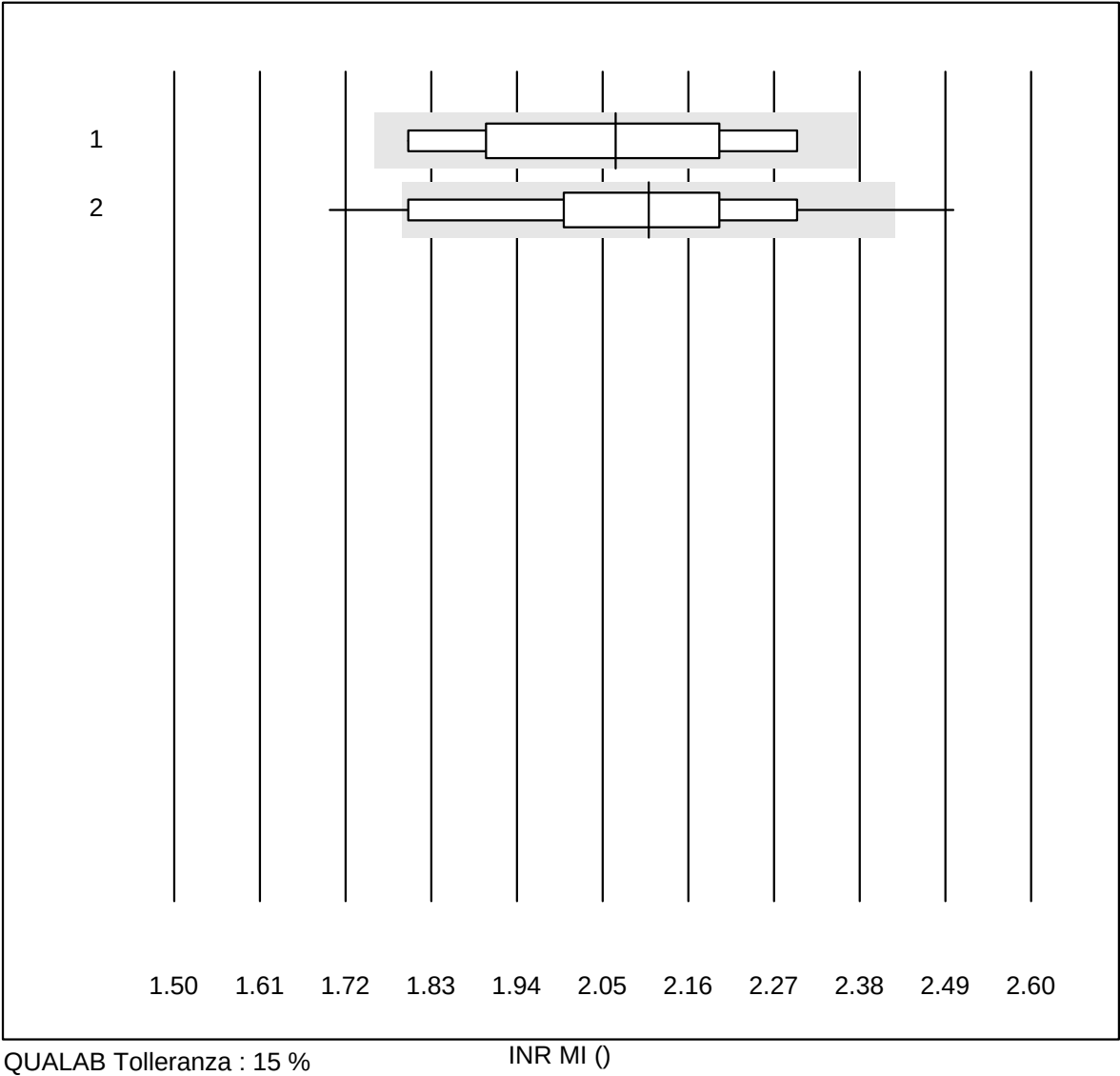

QUALAB Tolleranza : 15 %

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	microINR Expert	22	81.8	0.0	18.2	2.1	8.1	e
2	MicroINR	94	76.6	5.3	18.1	2.1	8.6	e

INR Xprecia

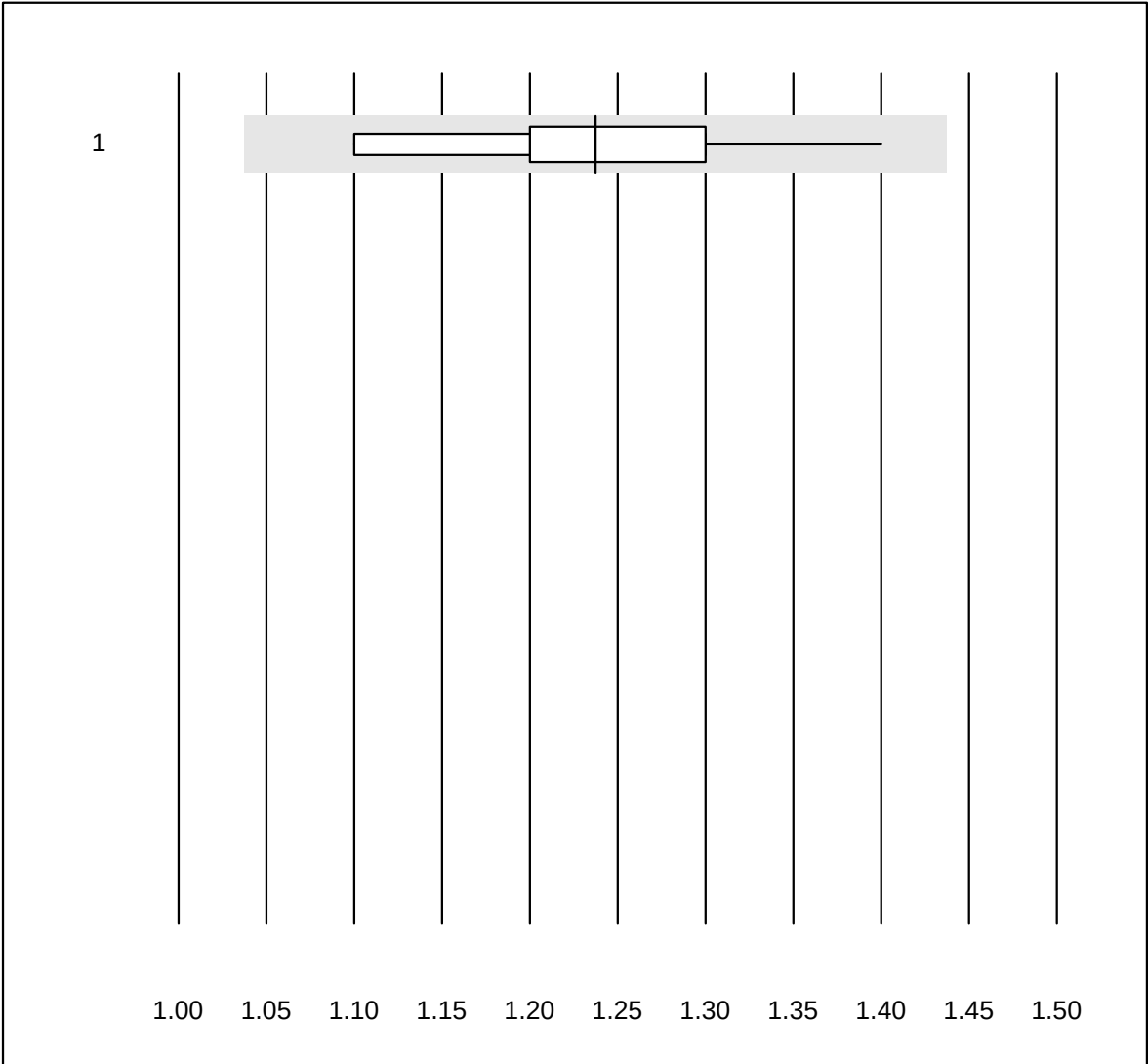


QUALAB Tolleranza : 15 %
(< 1.3: +/- 0.2)

INR Xprecia ()

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Xprecia	40	100.0	0.0	0.0	1.2	6.5	e


INR Lumira Dx

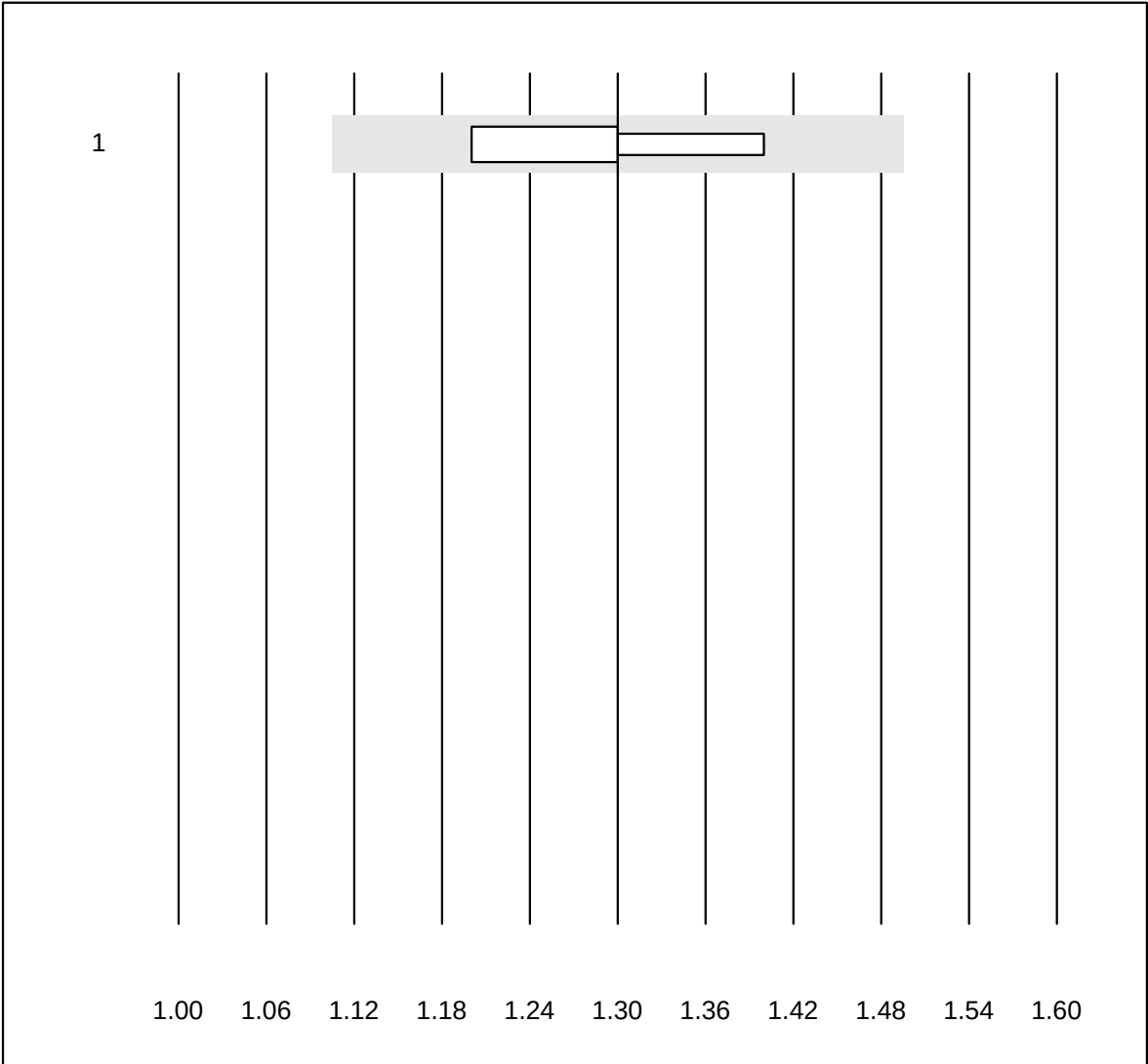

QUALAB Tolleranza : 15 %

INR Lumira Dx ()

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Lumira Dx	7	100.0	0.0	0.0	1.3	5.4	e*

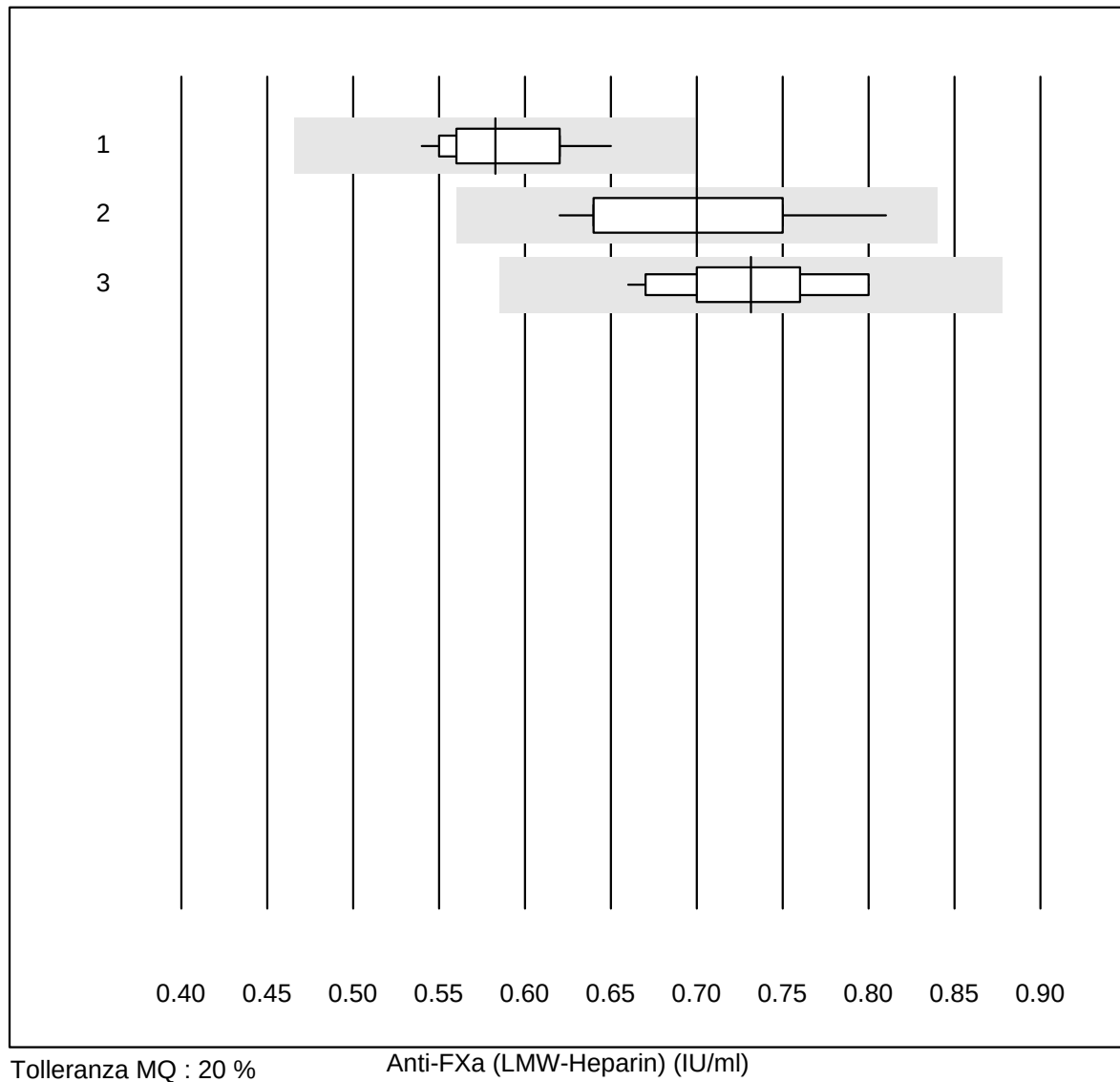
Anti-FXa (LMW-Heparin)

Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (LMW-Heparin) (IU/ml)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	0.58	6.1	e
2 ACL	23	100.0	0.0	0.0	0.70	7.3	e
3 altri metodi	18	100.0	0.0	0.0	0.73	5.8	e

Anti-FXa (Rivaroxaban)

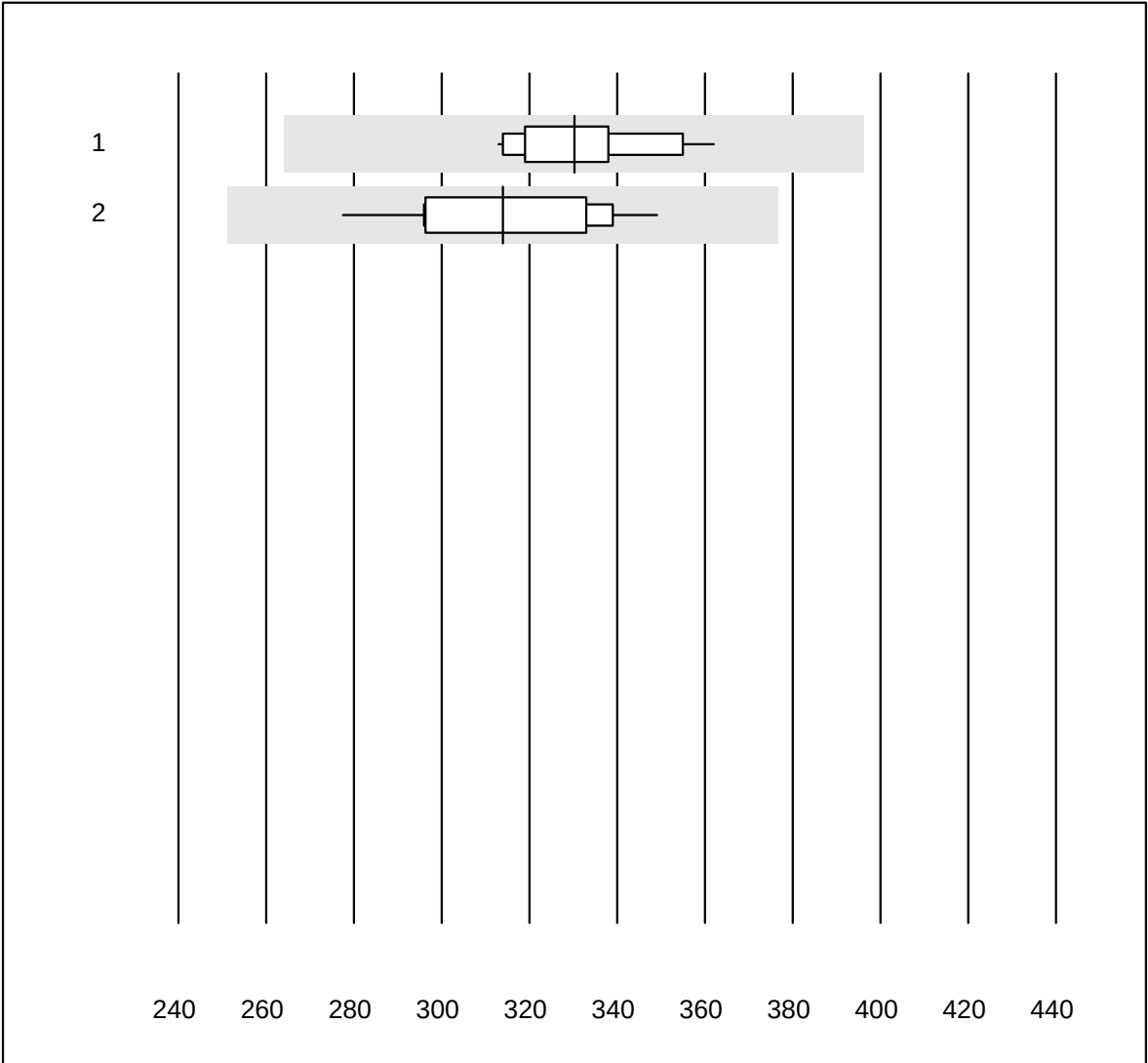


Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (Rivaroxaban) (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	330.25	4.8	e
2	ACL	11	100.0	0.0	0.0	313.88	7.3	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Anti-FXa (Apixaban)

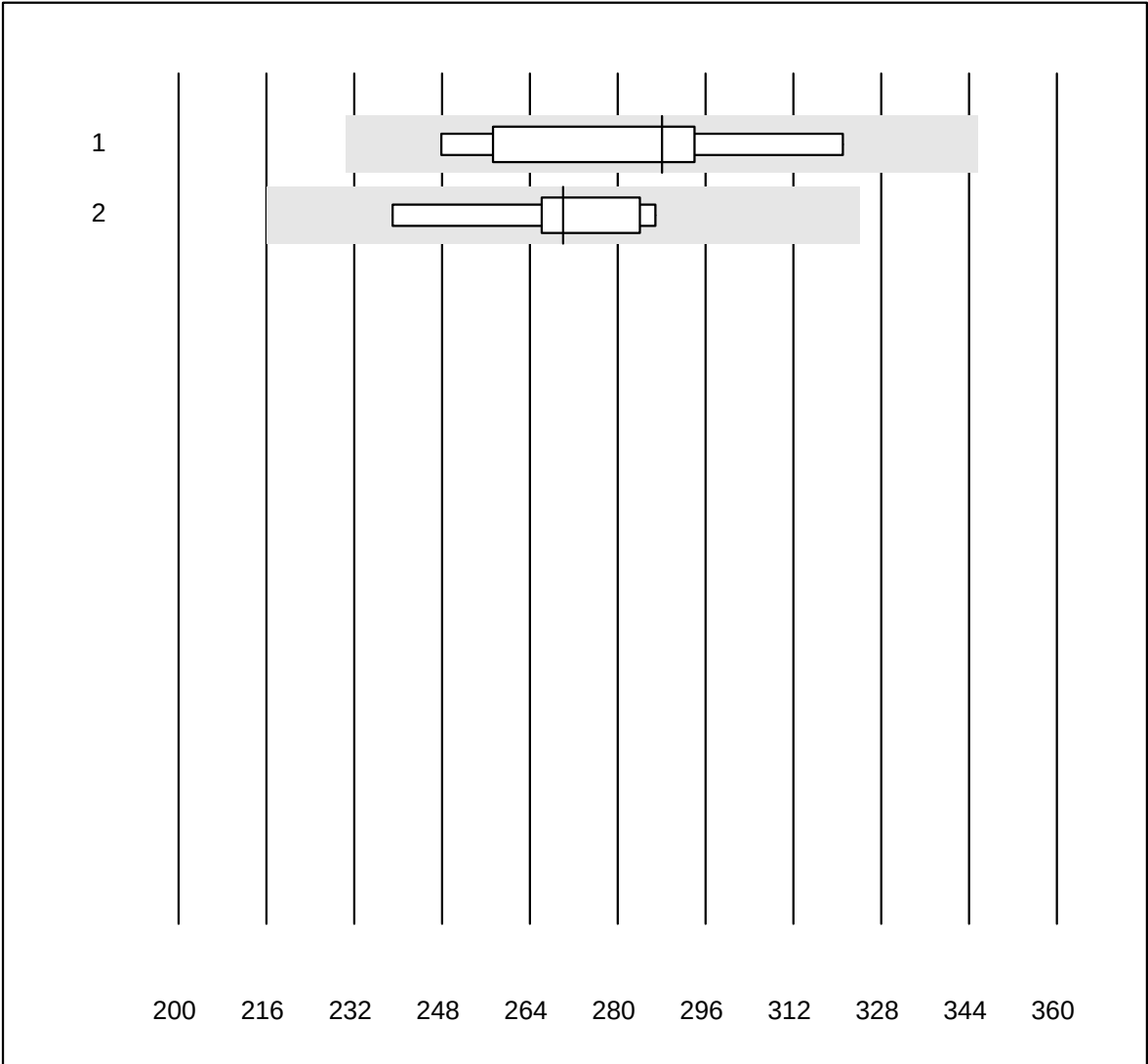


Tolleranza MQ : 20 % Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	288.00	8.6	e*
2	ACL	5	100.0	0.0	0.0	270.10	7.1	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Anti-FXa (Edoxaban)

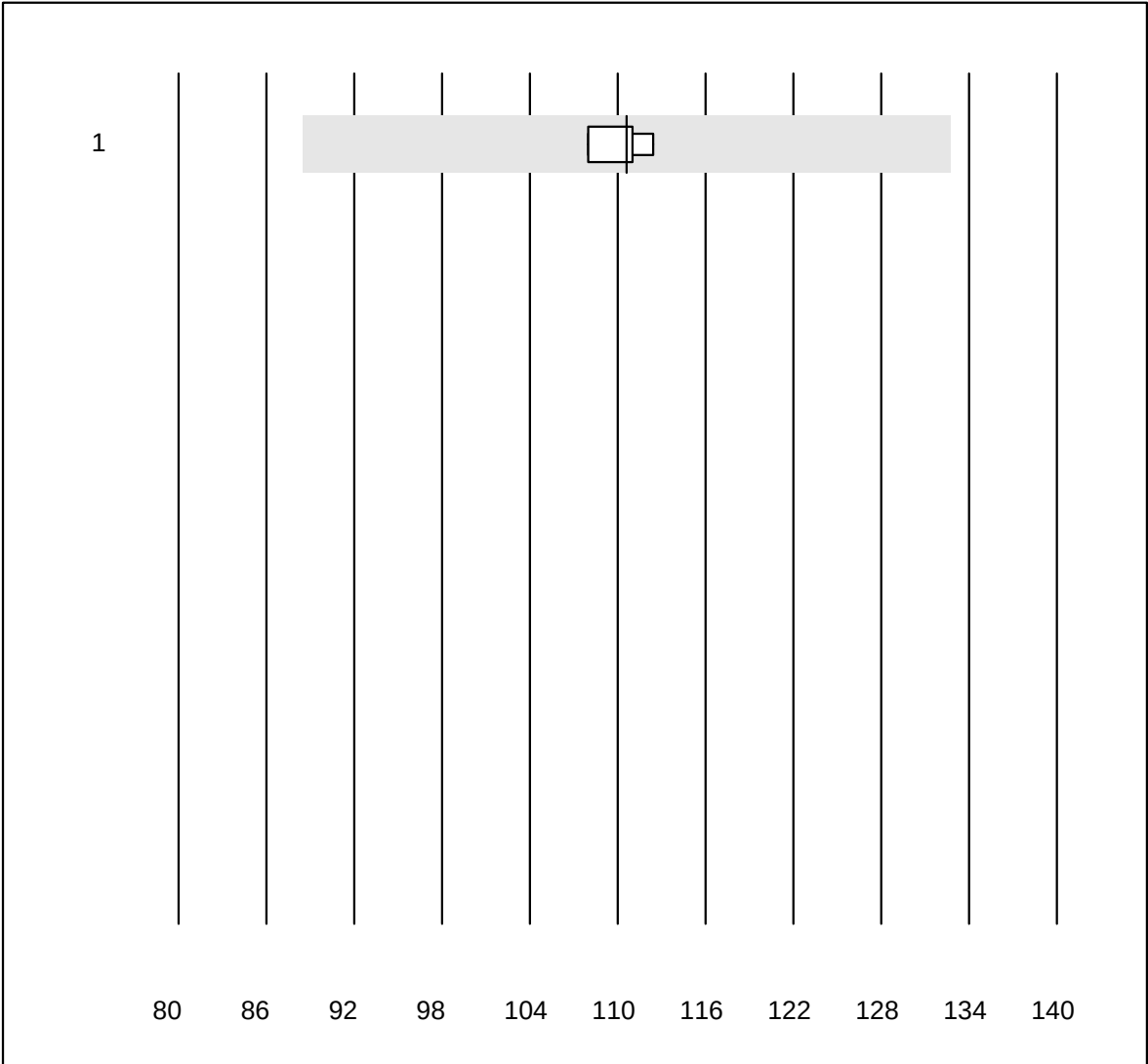


Tolleranza MQ : 20 %

Anti-FXa (Edoxaban) (µg/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	110.60	1.7	e

INR Labpad

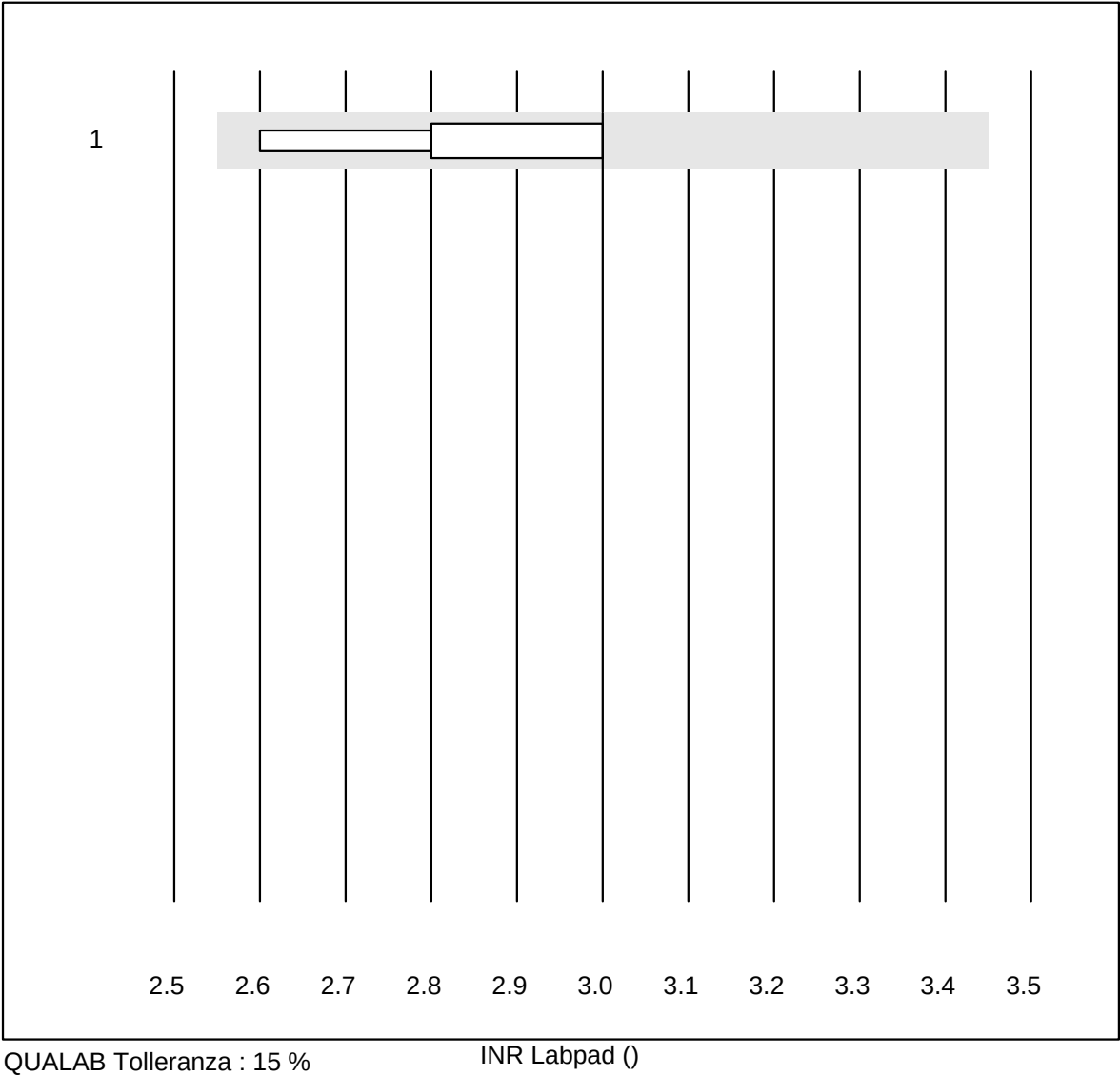

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Labpad	5	100.0	0.0	0.0	3.0	6.2	e*


Emoglobina

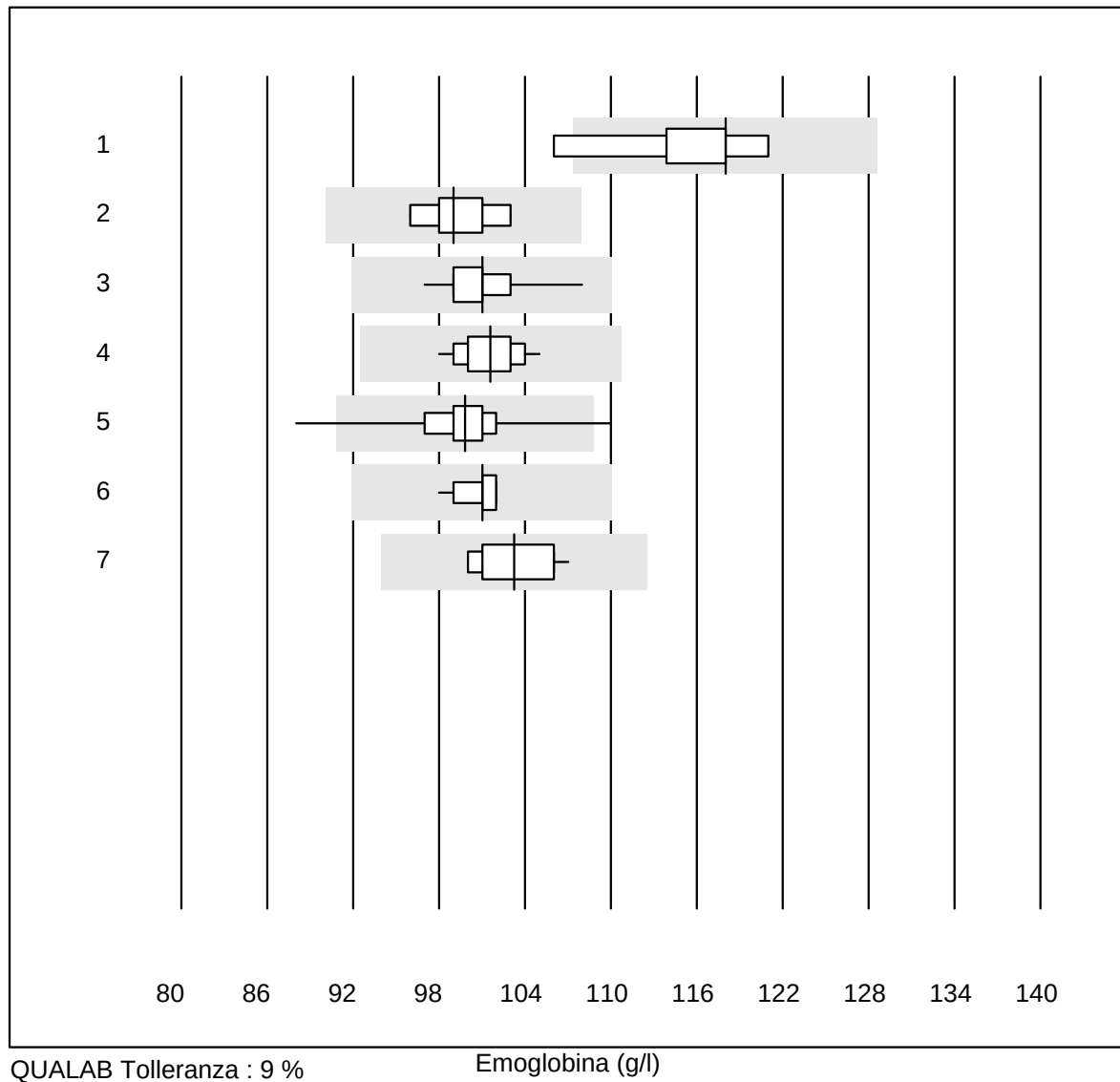

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Hemocue Hb 801	7	85.7	14.3	0.0	118.0	4.2	e*
2 Automatico	6	83.3	0.0	16.7	99.0	2.7	e*
3 Cianometemoglobina	13	92.3	0.0	7.7	101.0	2.7	e
4 Sysmex X	60	98.3	0.0	1.7	101.6	1.8	e
5 Hemocue	386	93.5	2.1	4.4	99.8	2.7	e
6 Hemocontrol	14	92.9	0.0	7.1	101.0	1.3	e
7 DiaSpect	14	71.4	0.0	28.6	103.2	2.5	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Emoglobina

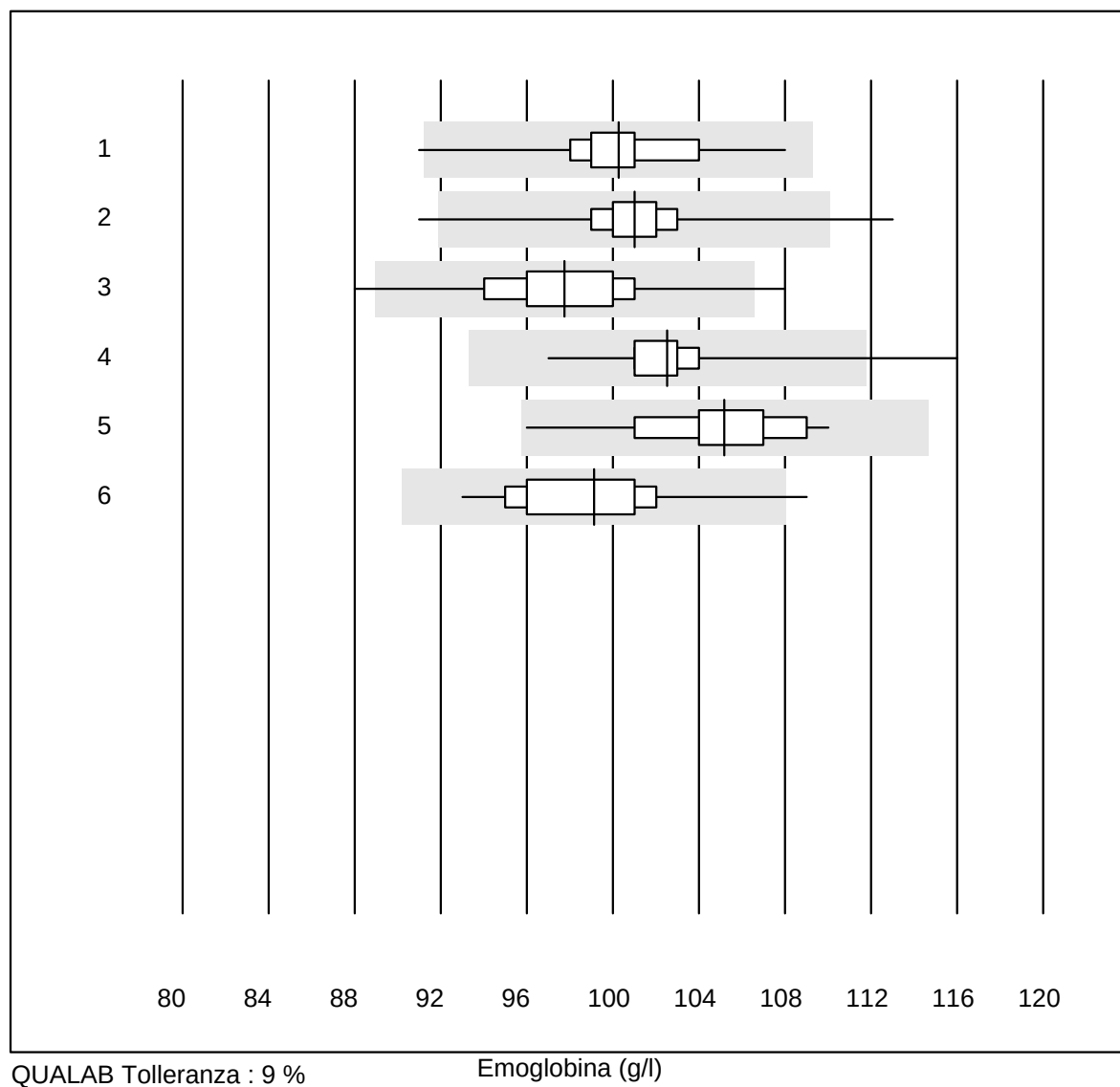

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex Poch - 100i	174	96.5	0.6	2.9	100.3	2.3	e
2 Sysmex XP 300	571	97.4	0.5	2.1	101.0	2.0	e
3 Mythic	203	97.5	1.5	1.0	97.8	3.1	e
4 Sysmex XQ-320	212	93.9	1.9	4.2	102.5	2.2	e
5 Swelab	26	100.0	0.0	0.0	105.2	3.1	e
6 Micros 60	45	93.4	2.2	4.4	99.1	3.5	e


10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ematocrito

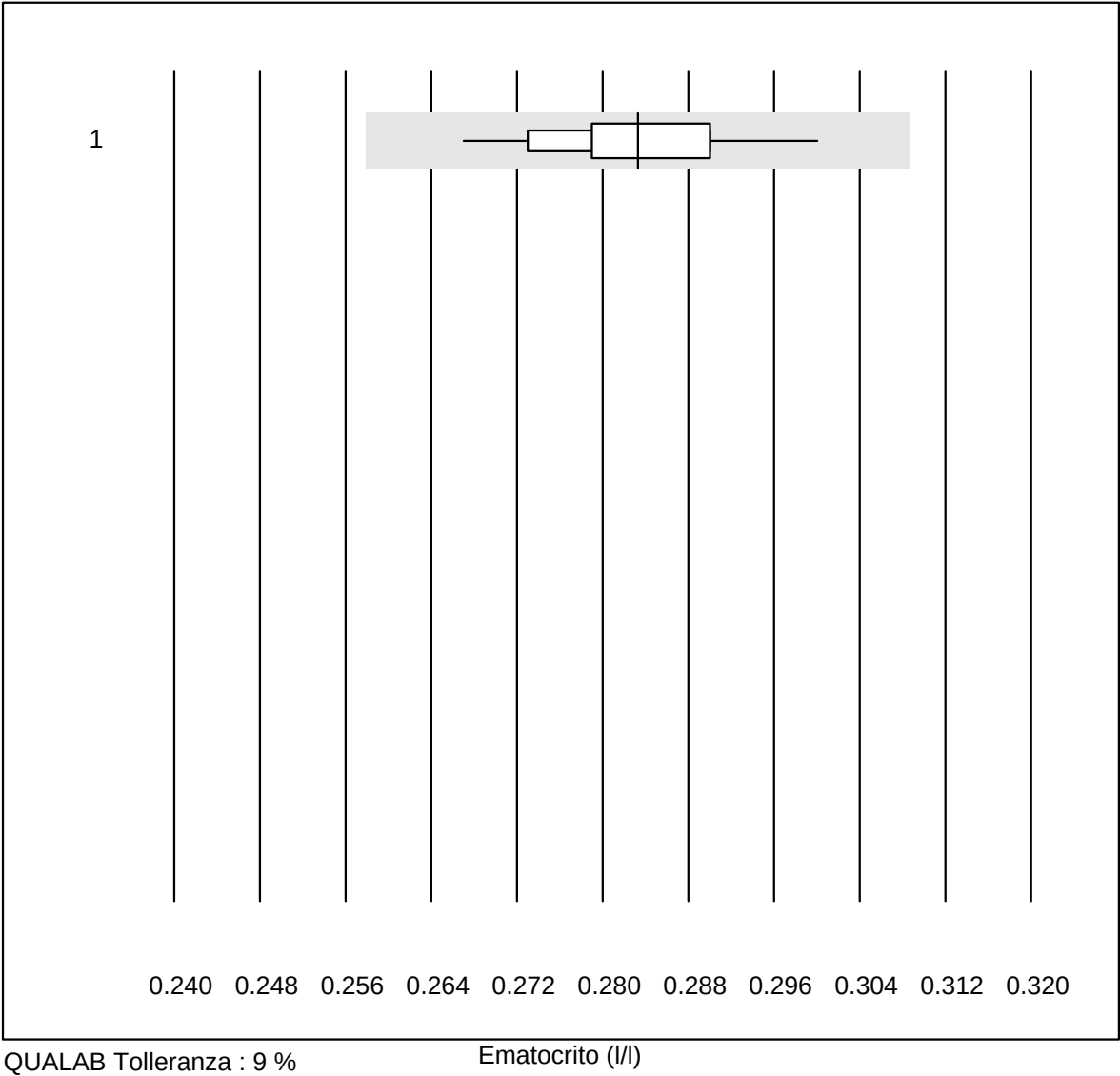

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex X	60	98.3	0.0	1.7	0.28	2.4	e
9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Ematocrito

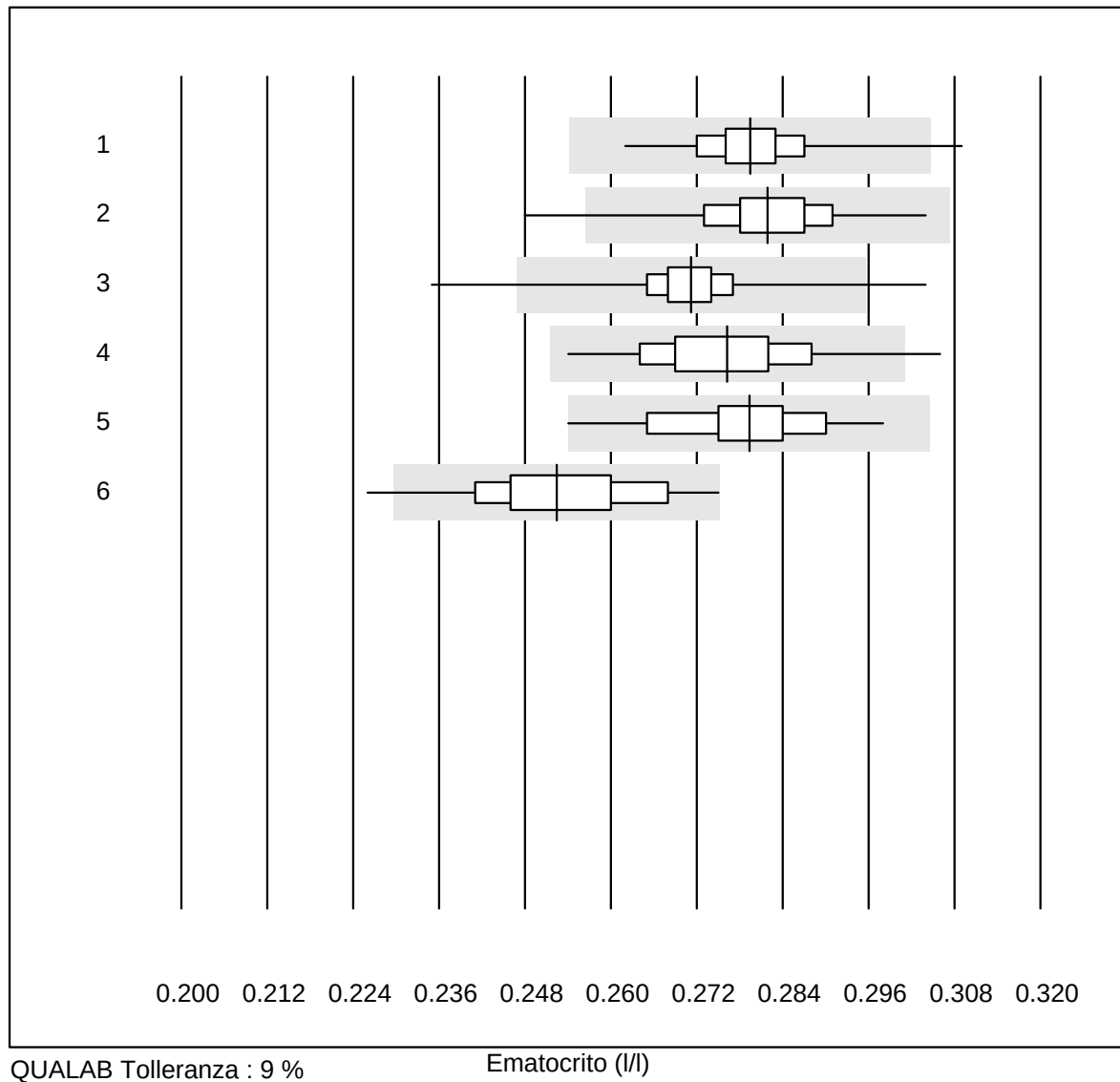

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex XQ-320	210	94.3	0.5	5.2	0.28	2.3	e
2	Sysmex PocH - 100i	174	96.6	1.1	2.3	0.28	2.8	e
3	Sysmex XP 300	572	97.2	1.2	1.6	0.27	2.3	e
4	Mythic	202	97.5	1.0	1.5	0.28	3.3	e
5	Swelab	26	96.2	3.8	0.0	0.28	3.5	e
6	Micros 60	45	84.5	2.2	13.3	0.25	4.0	e


9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Eritrociti

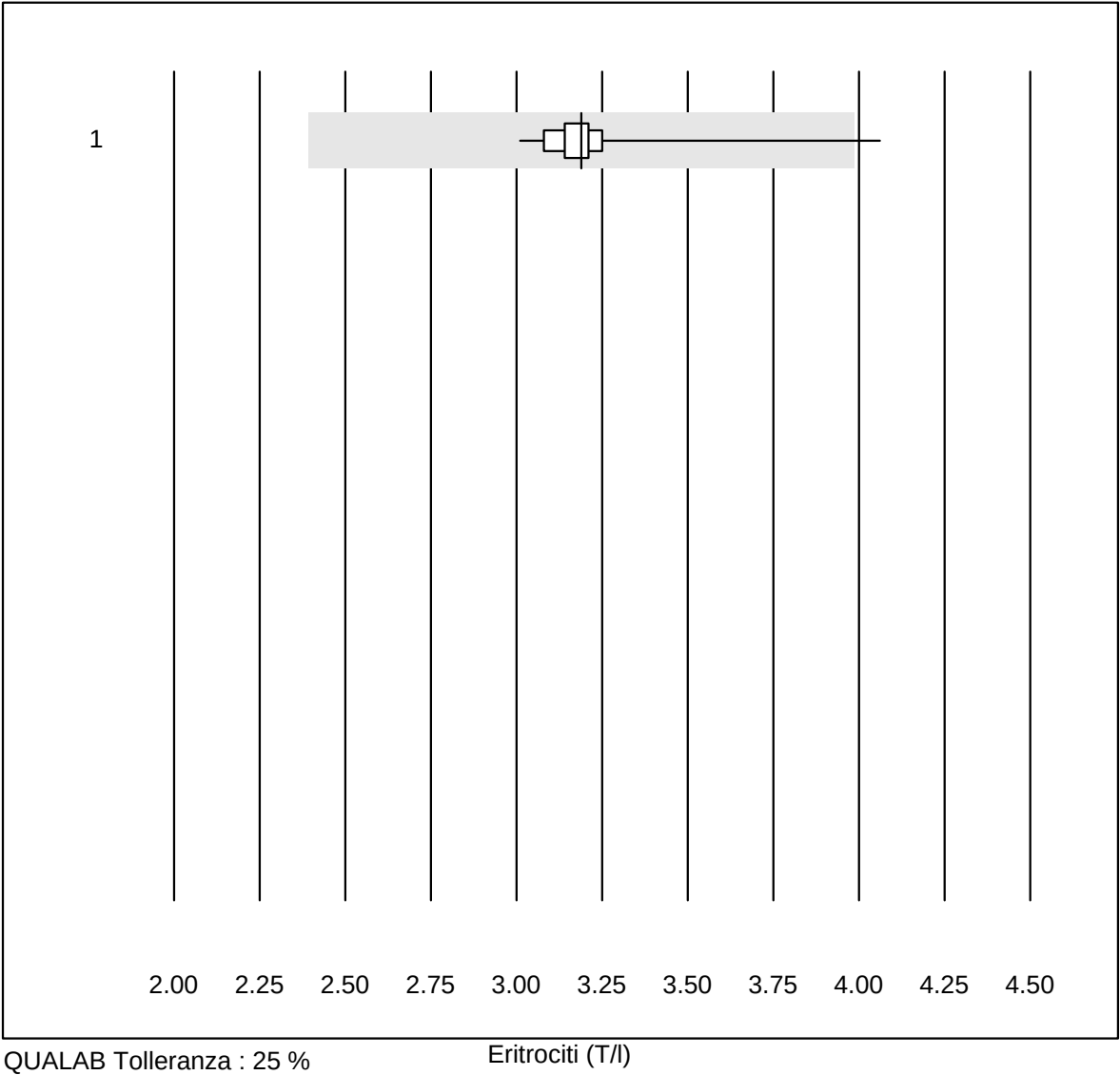

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex X	60	98.3	1.7	0.0	3.19	4.0	e
6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Eritrociti

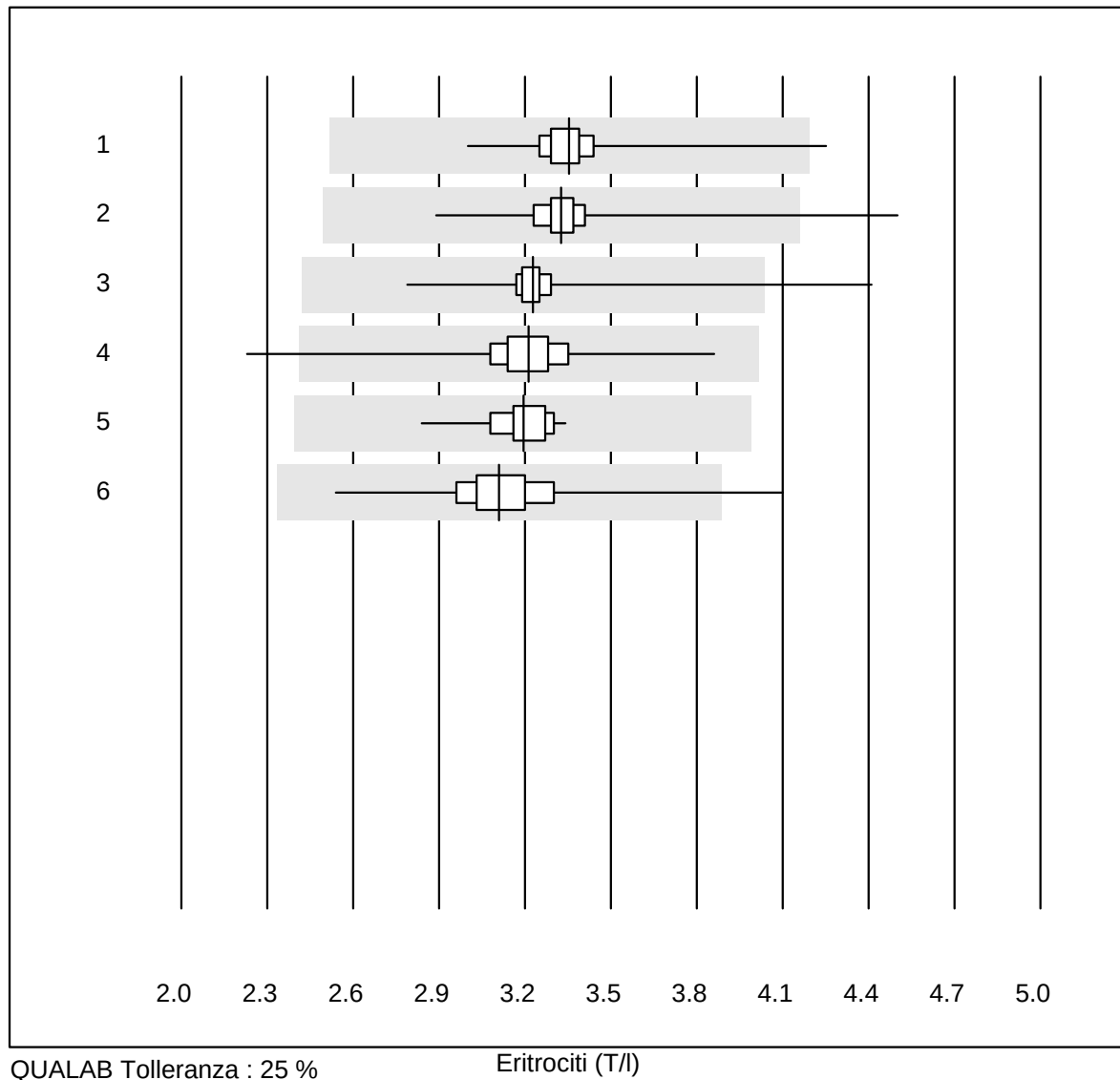

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex XQ-320	210	96.6	1.0	2.4	3.35	4.5	e
2 Sysmex PocH - 100i	174	97.1	0.6	2.3	3.33	3.7	e
3 Sysmex XP 300	572	98.8	0.2	1.0	3.23	3.0	e
4 Mythic	202	99.5	0.5	0.0	3.21	4.2	e
5 Swelab	26	100.0	0.0	0.0	3.19	3.7	e
6 Micros 60	45	91.1	2.2	6.7	3.11	7.3	e

9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Leucociti

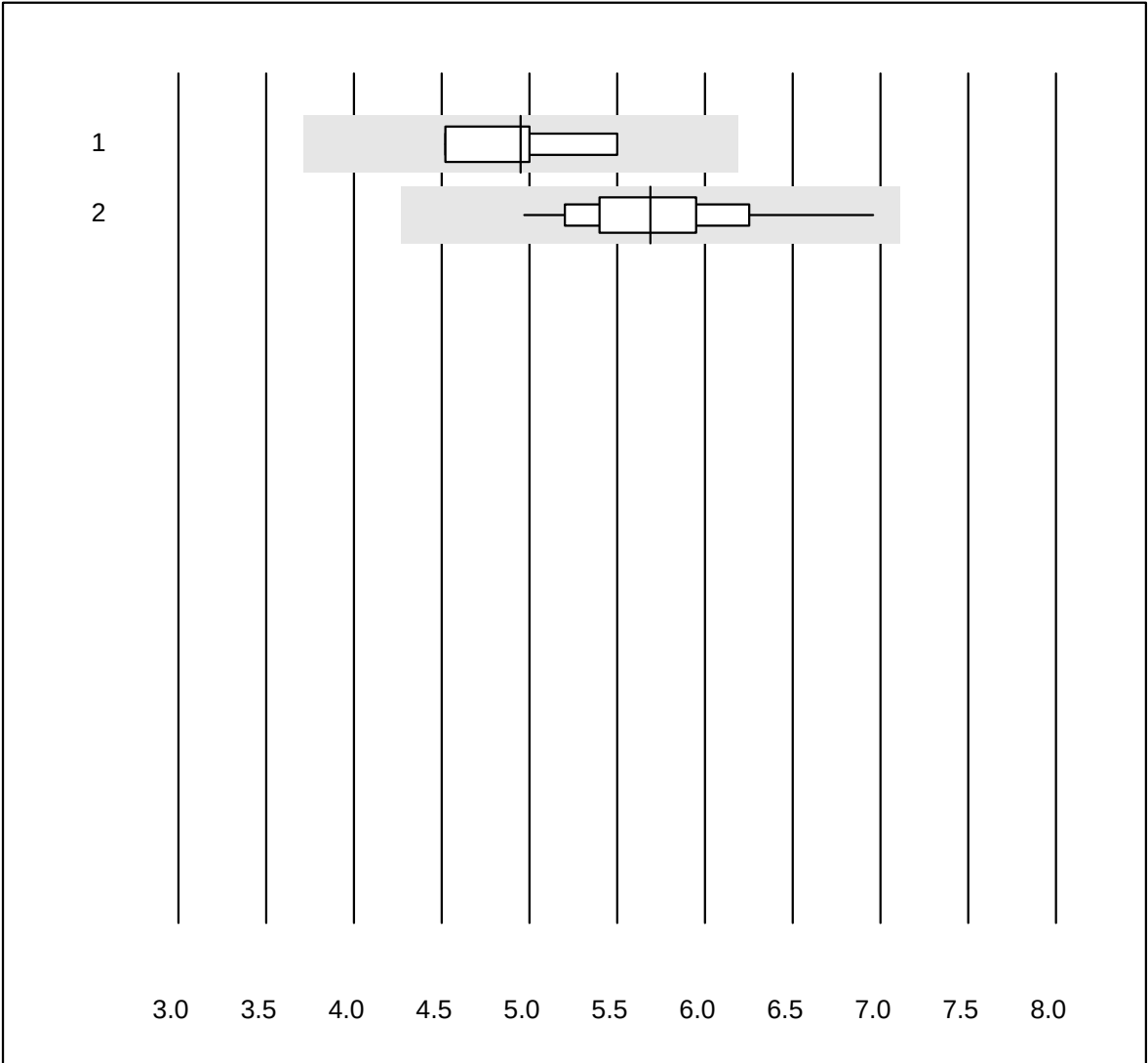


QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Microscopio	4	100.0	0.0	0.0	4.95	8.1	e*
2	Sysmex X	60	100.0	0.0	0.0	5.69	7.4	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Leucociti

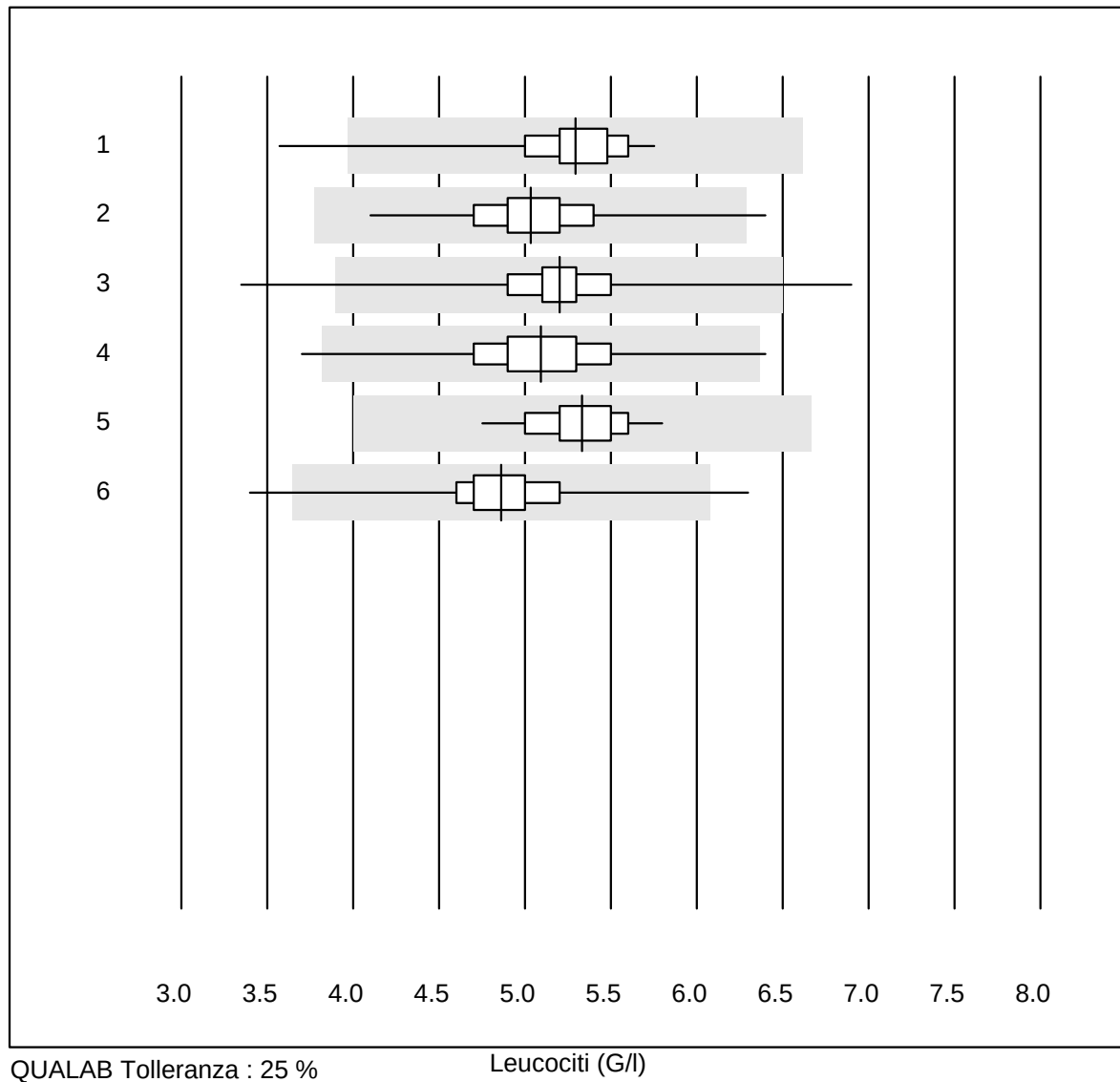

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex XQ-320	209	98.1	1.4	0.5	5.30	5.9	e
2	Sysmex PocH - 100i	174	98.8	0.6	0.6	5.03	6.0	e
3	Sysmex XP 300	572	98.8	1.2	0.0	5.20	5.7	e
4	Mythic	203	98.0	1.0	1.0	5.09	6.4	e
5	Swelab	26	100.0	0.0	0.0	5.33	4.7	e
6	Micros 60	45	95.6	4.4	0.0	4.86	8.2	e

10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


Trombociti

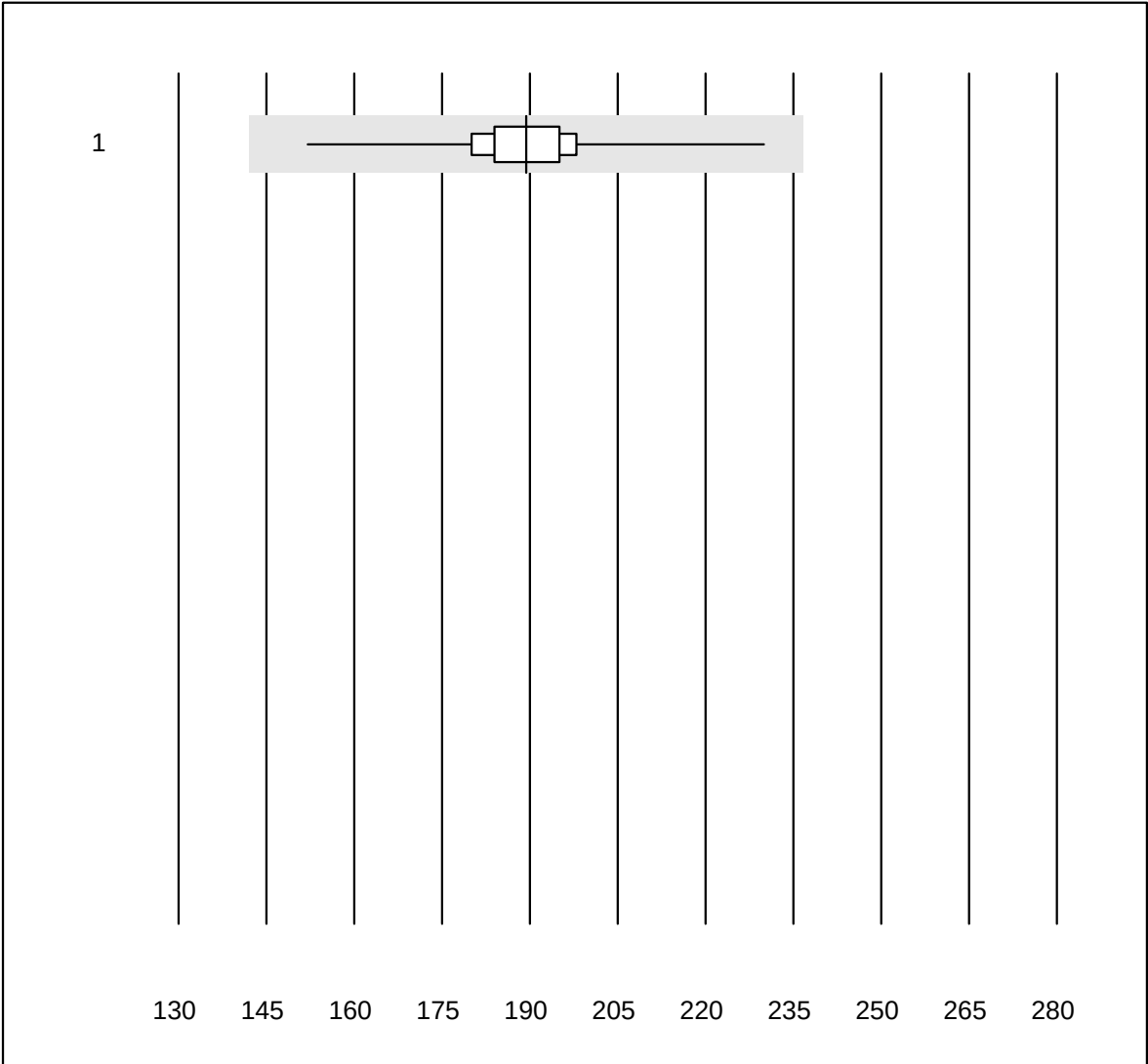

QUALAB Tolleranza : 25 % Trombociti (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex X	60	100.0	0.0	0.0	189.3	5.4	e
8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Trombociti

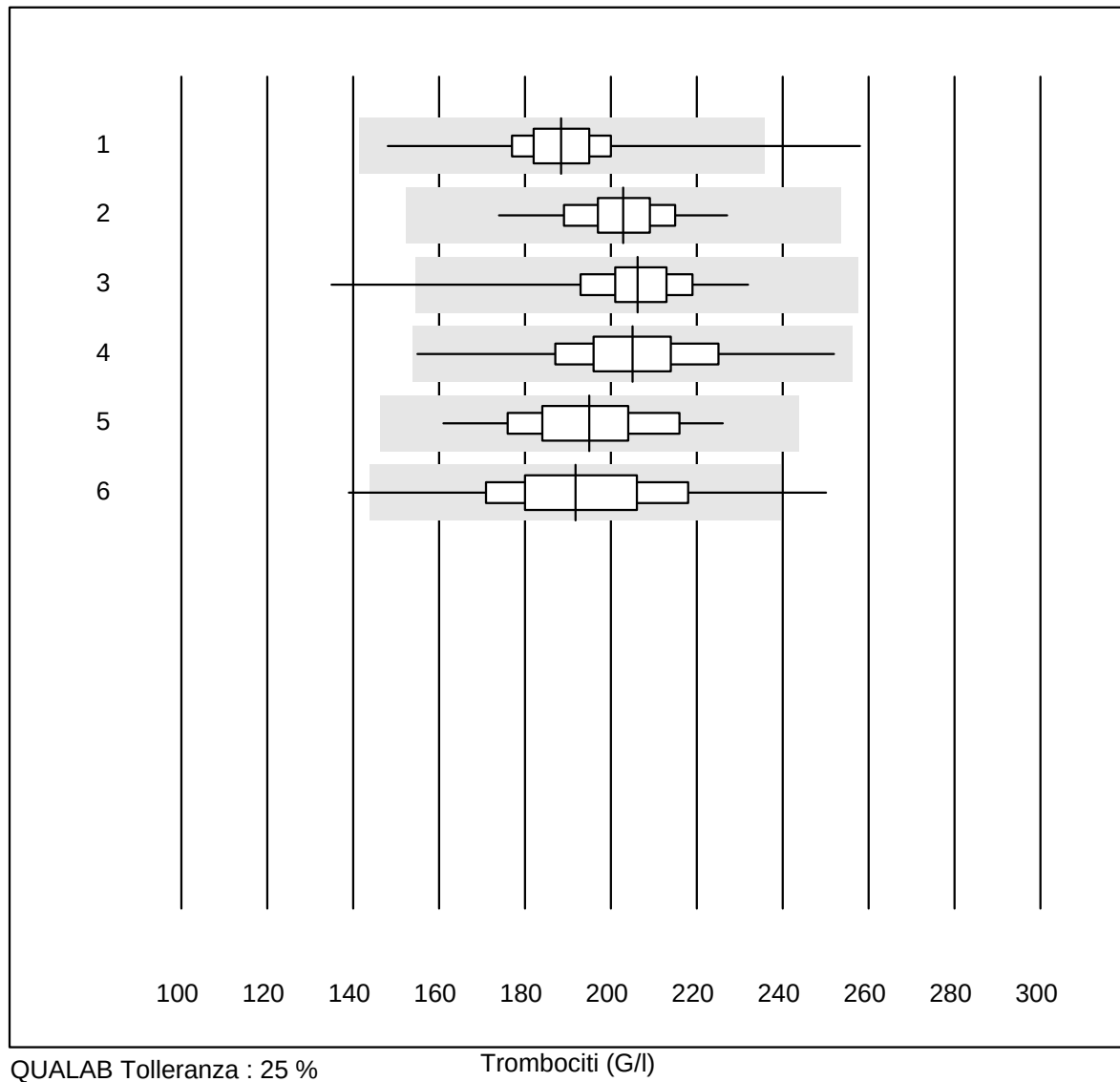

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex XQ-320	210	97.6	0.5	1.9	188.4	6.0	e
2	Sysmex PocH - 100i	174	99.4	0.0	0.6	202.9	4.7	e
3	Sysmex XP 300	573	99.5	0.2	0.3	206.2	5.2	e
4	Mythic	204	99.0	0.0	1.0	205.0	7.4	e
5	Swelab	26	100.0	0.0	0.0	195.0	7.8	e
6	Micros 60	45	86.7	8.9	4.4	191.7	11.7	e

9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Emoglobina H2

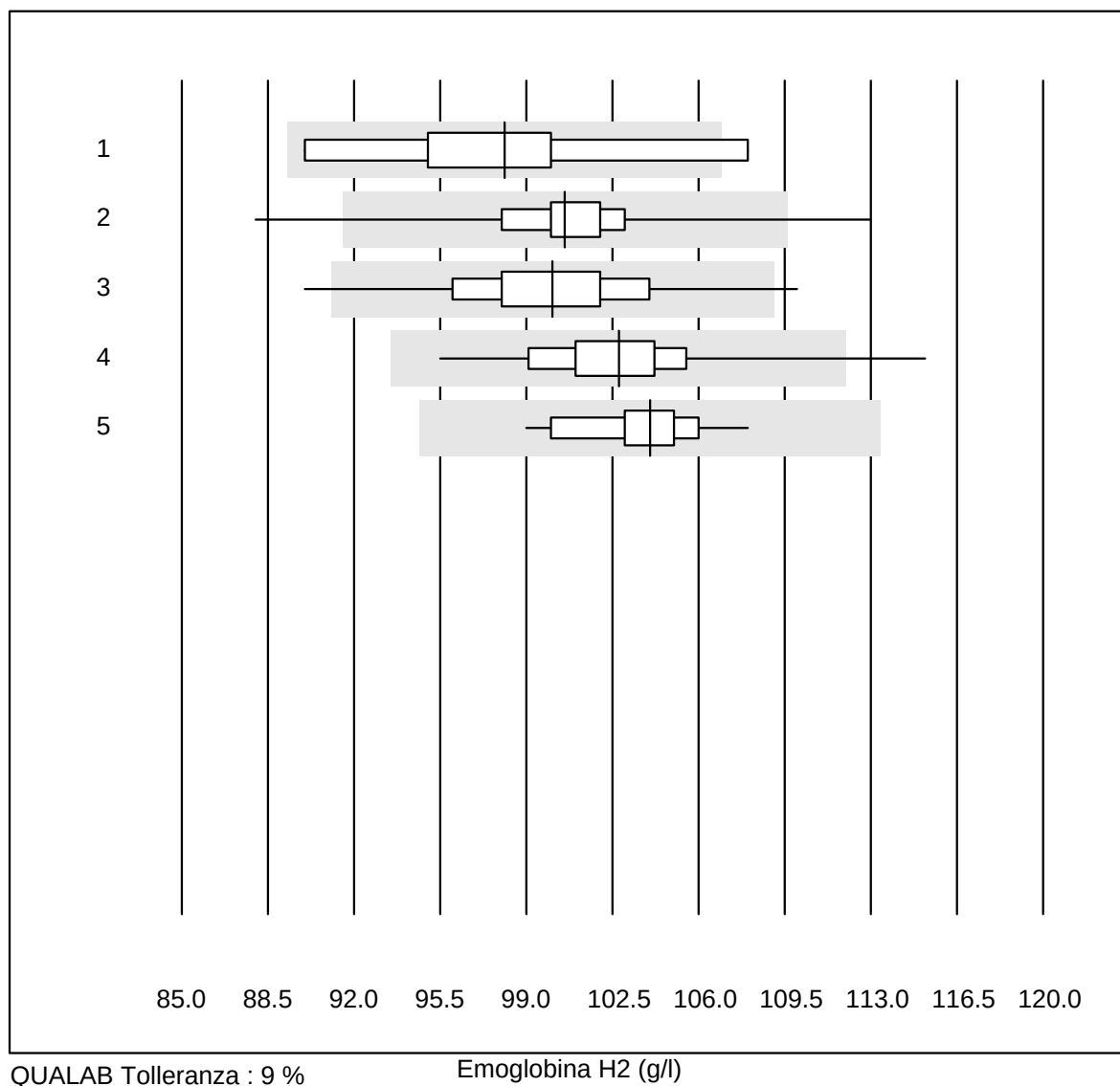

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Dymind DP-H10	10	70.0	20.0	10.0	98.1	6.2	e*
2	Microsemi	920	97.2	1.2	1.6	100.6	2.3	e
3	Z3	308	96.8	1.3	1.9	100.1	3.3	e
4	MEK-1303/5	80	93.7	1.3	5.0	102.8	2.7	e
5	Celltac Alpha (Nihon	42	95.2	0.0	4.8	104.0	2.1	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


Ematocrito H2

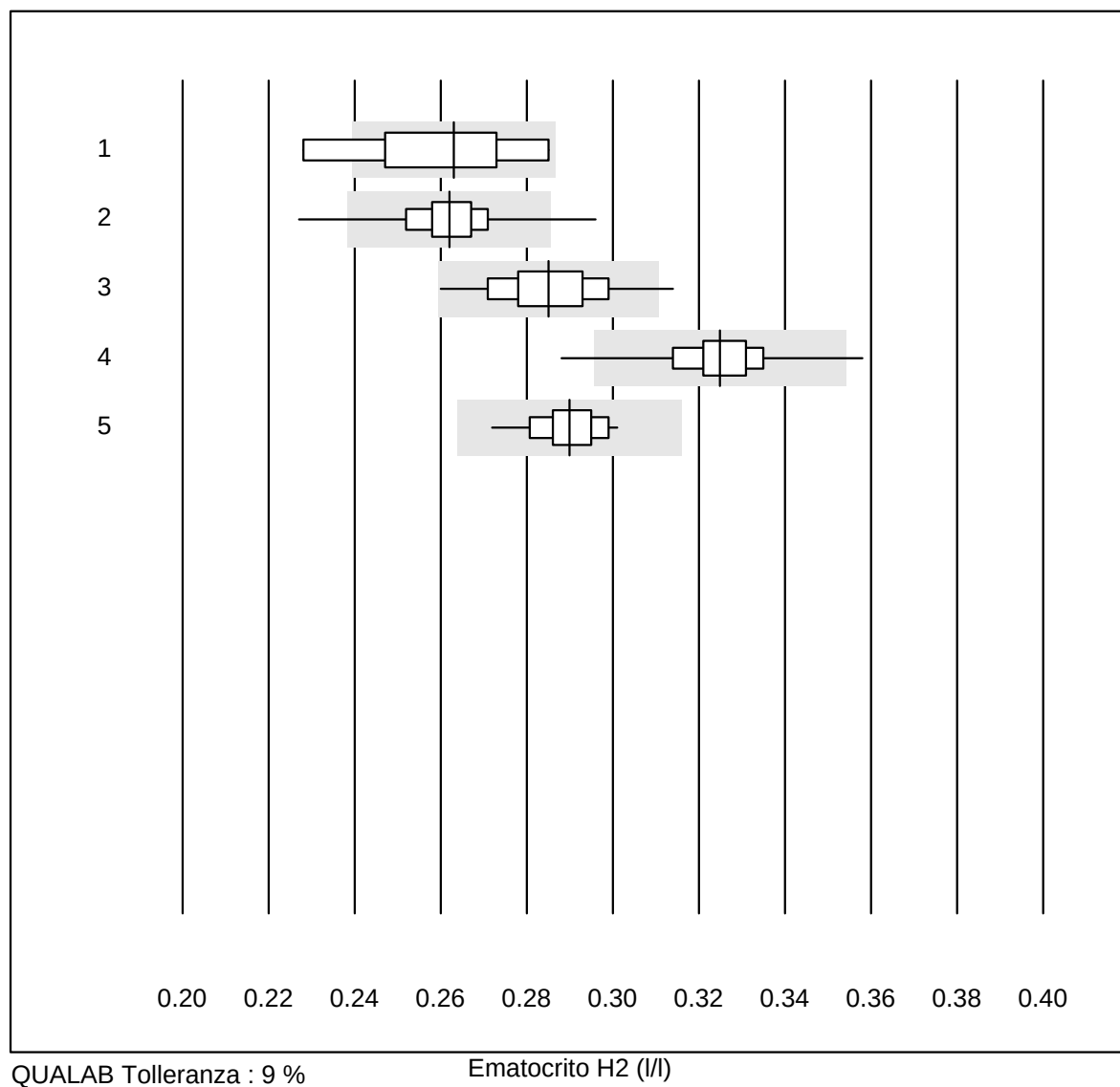

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Dymind DP-H10	10	80.0	10.0	10.0	0.26	6.8	e*
2 Microsemi	921	95.8	2.0	2.2	0.26	3.2	e
3 Z3	309	97.1	0.3	2.6	0.29	3.6	e
4 MEK-1303/5	80	92.4	3.8	3.8	0.32	3.0	e
5 Celltac Alpha (Nihon	42	88.1	0.0	11.9	0.29	2.4	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Leucociti H2

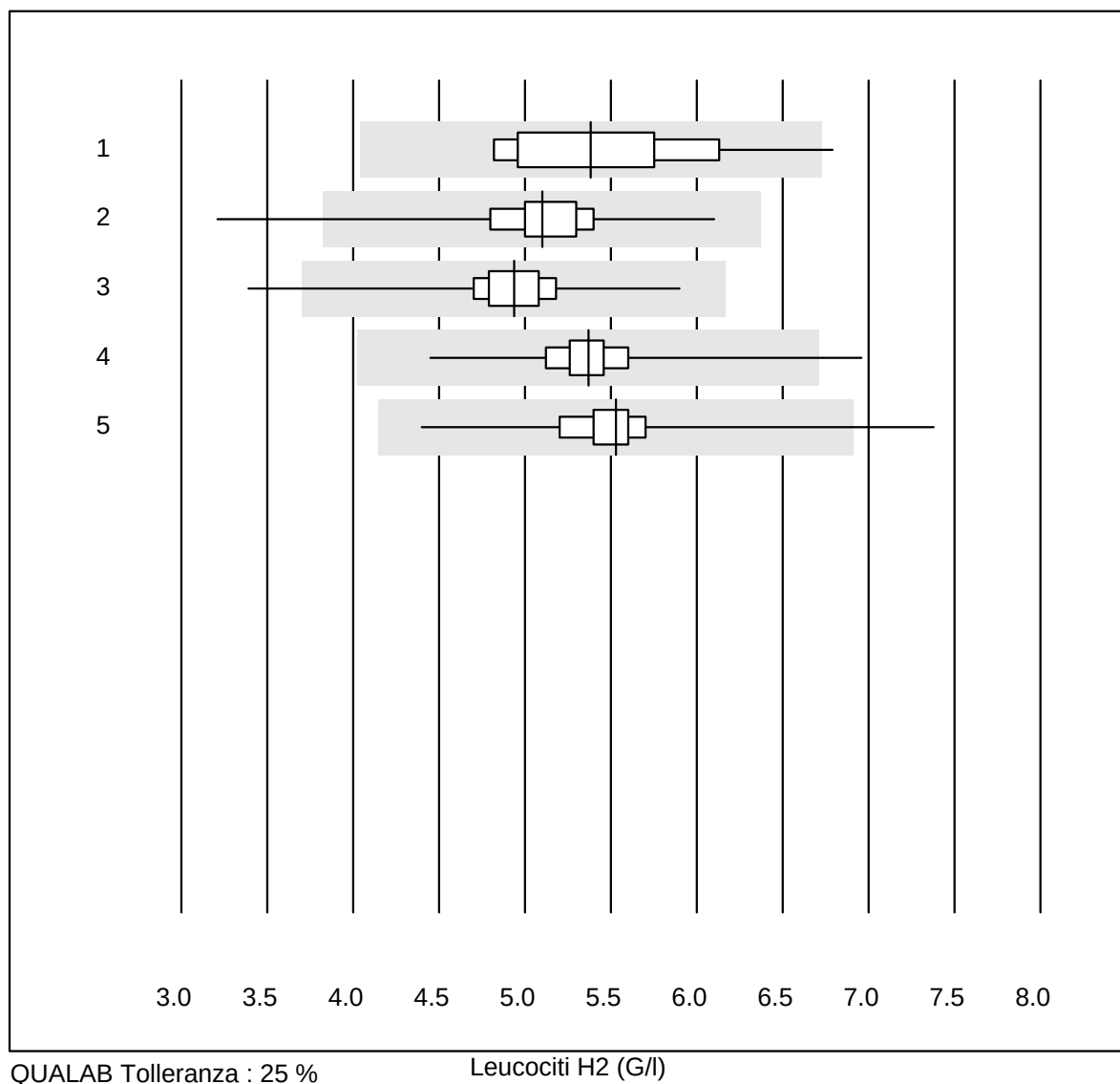


QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti H2 (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Dymind DP-H10	10	90.0	10.0	0.0	5.38	12.0	e*
2	Microsemi	920	99.1	0.4	0.5	5.10	5.4	e
3	Z3	309	99.1	0.6	0.3	4.94	4.9	e
4	MEK-1303/5	79	97.4	1.3	1.3	5.37	5.3	e
5	Celltac Alpha (Nihon)	42	97.6	2.4	0.0	5.53	6.9	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Trombociti H2

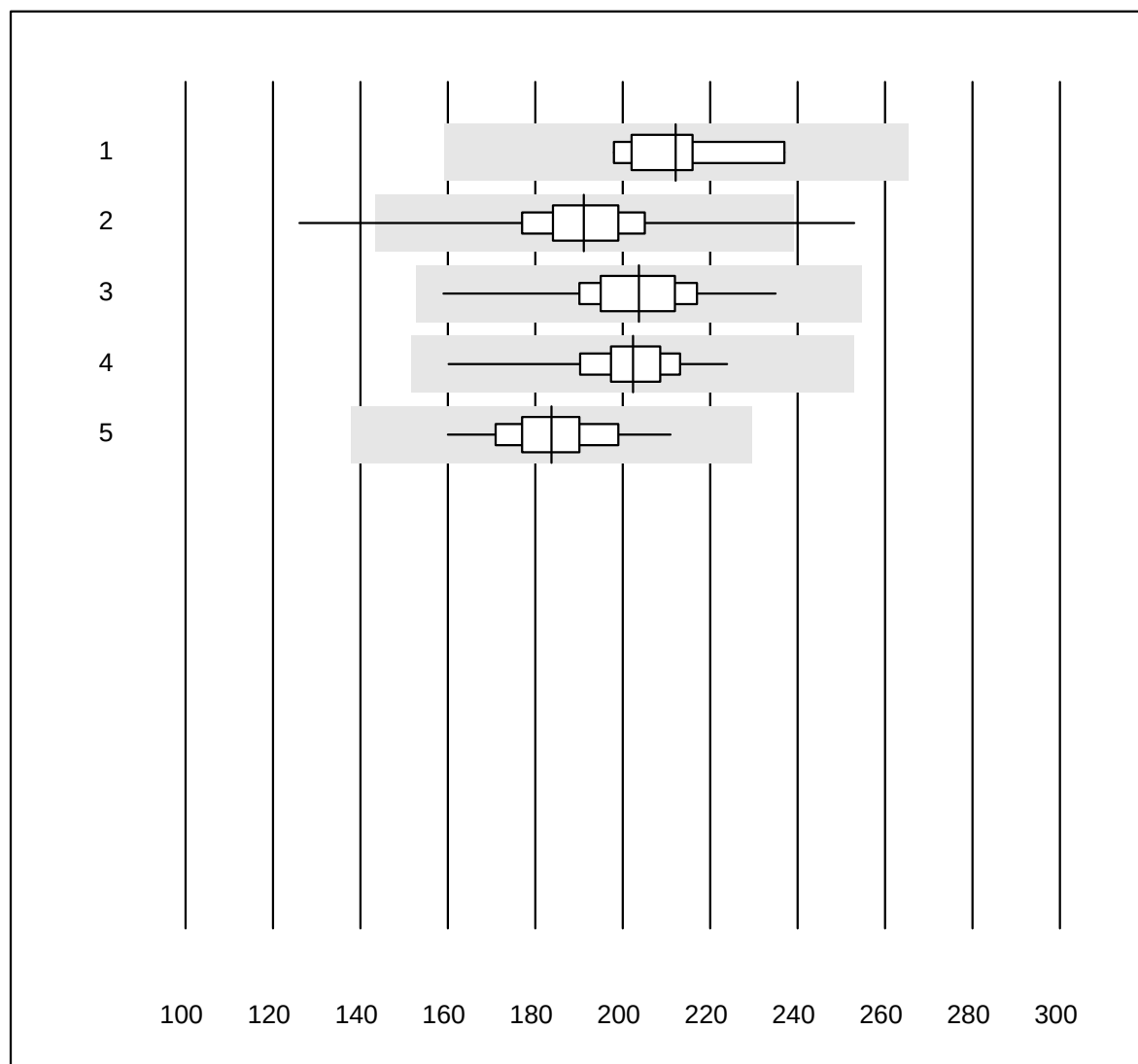


QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti H2 (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Dymind DP-H10	10	90.0	0.0	10.0	212.1	6.8	e
2	Microsemi	921	98.5	0.7	0.8	191.2	6.5	e
3	Z3	309	99.0	0.0	1.0	203.7	5.5	e
4	MEK-1303/5	78	97.4	0.0	2.6	202.3	5.2	e
5	Celltac Alpha (Nihon	42	95.2	0.0	4.8	183.7	6.0	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Eritrociti H2

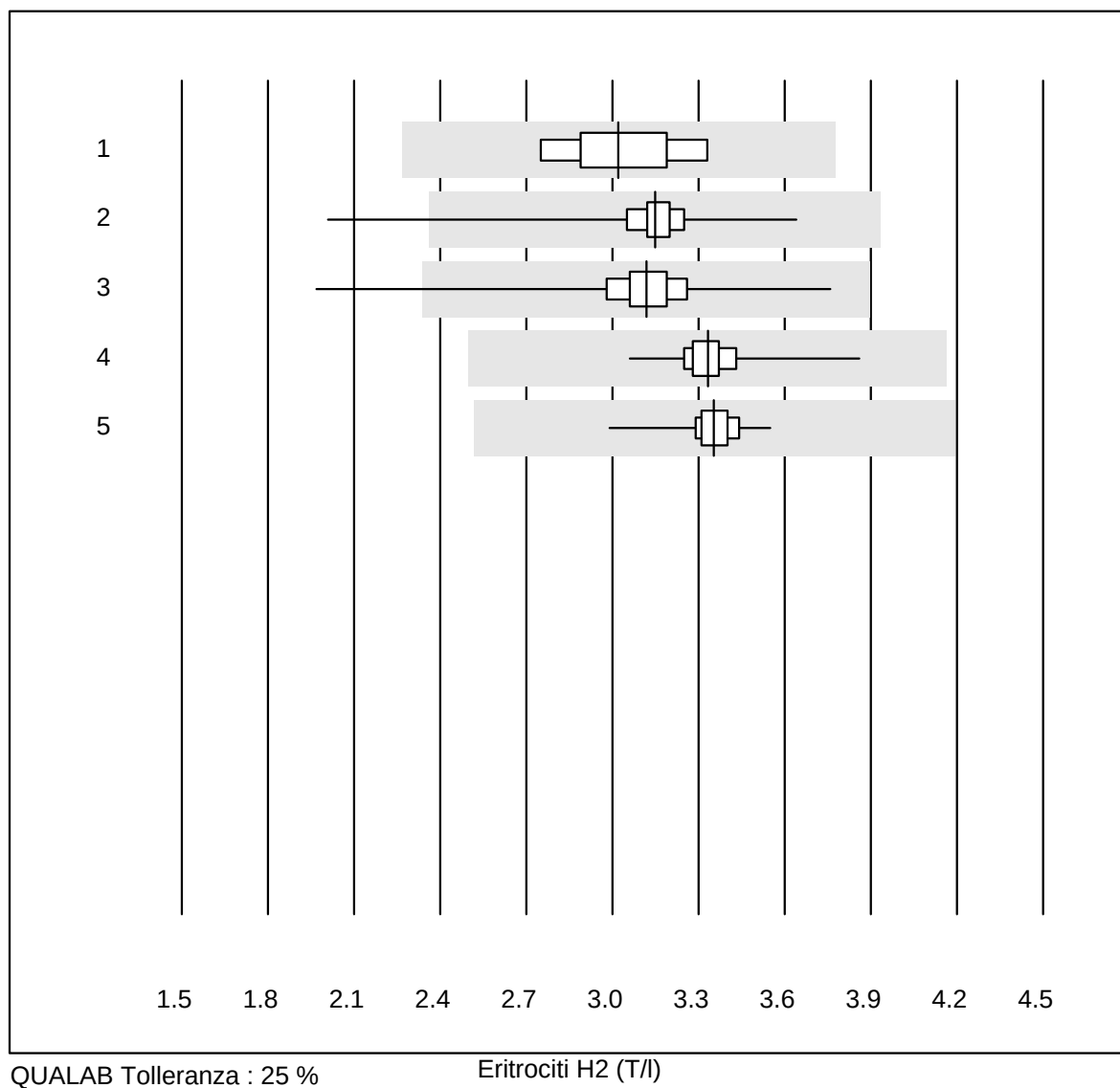


QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti H2 (T/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Dymind DP-H10	10	90.0	0.0	10.0	3.02	6.5	e
2 Microsemi	921	98.1	0.4	1.5	3.15	3.6	e
3 Z3	309	98.4	0.6	1.0	3.12	4.7	e
4 MEK-1303/5	80	95.0	0.0	5.0	3.33	2.9	e
5 Celltac Alpha (Nihon	42	95.2	0.0	4.8	3.35	2.6	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


CRP H2

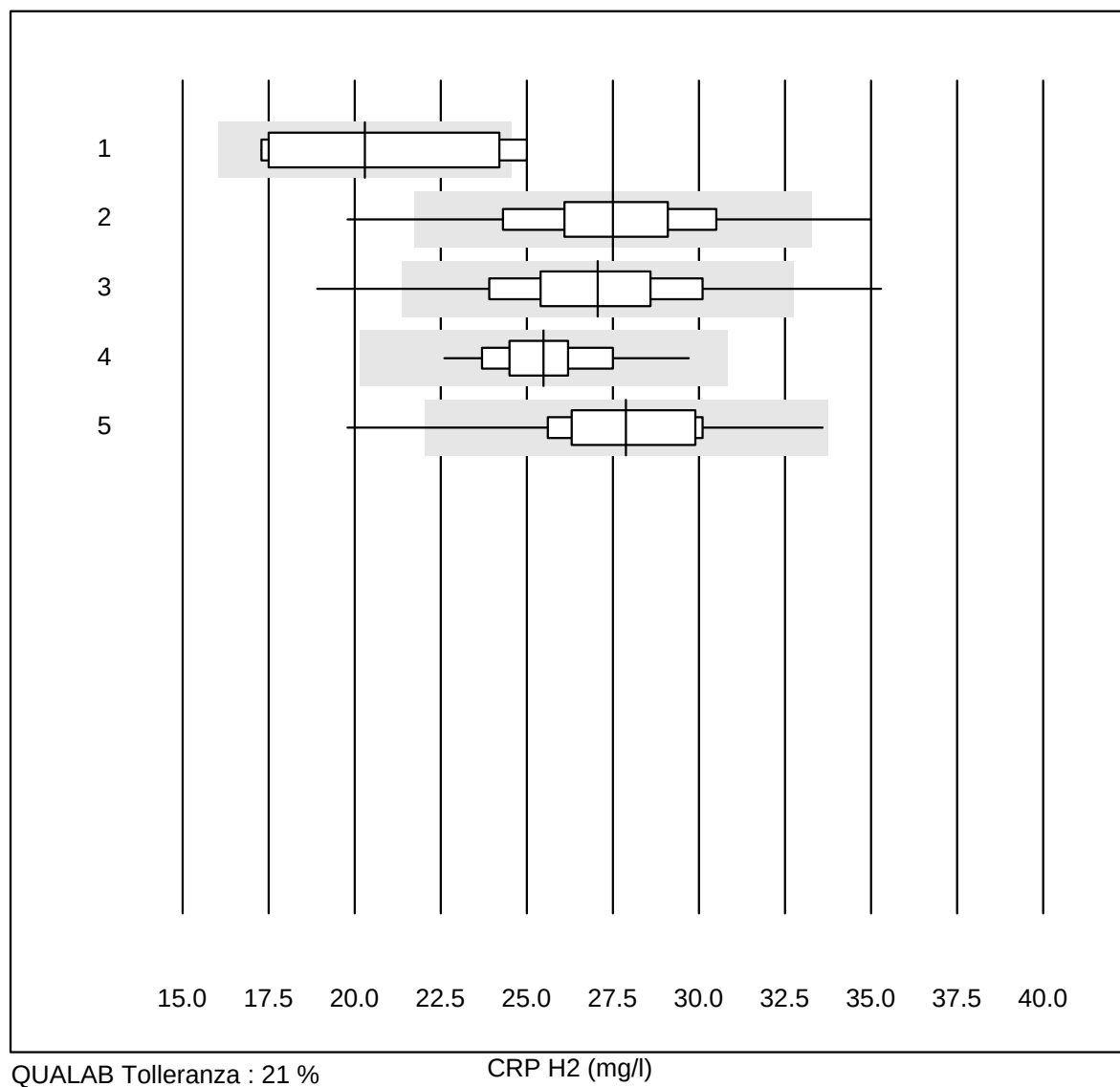

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Dymind DP-H10	9	66.7	11.1	22.2	20.3	15.8	e*
2 Microsemi	903	96.4	1.9	1.7	27.5	8.7	e
3 Z3	292	94.8	3.8	1.4	27.1	9.3	e
4 MEK-1303/5	73	95.9	0.0	4.1	25.5	5.6	e
5 Celltac chemi	18	72.2	5.6	22.2	27.9	11.5	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Emoglobina BG

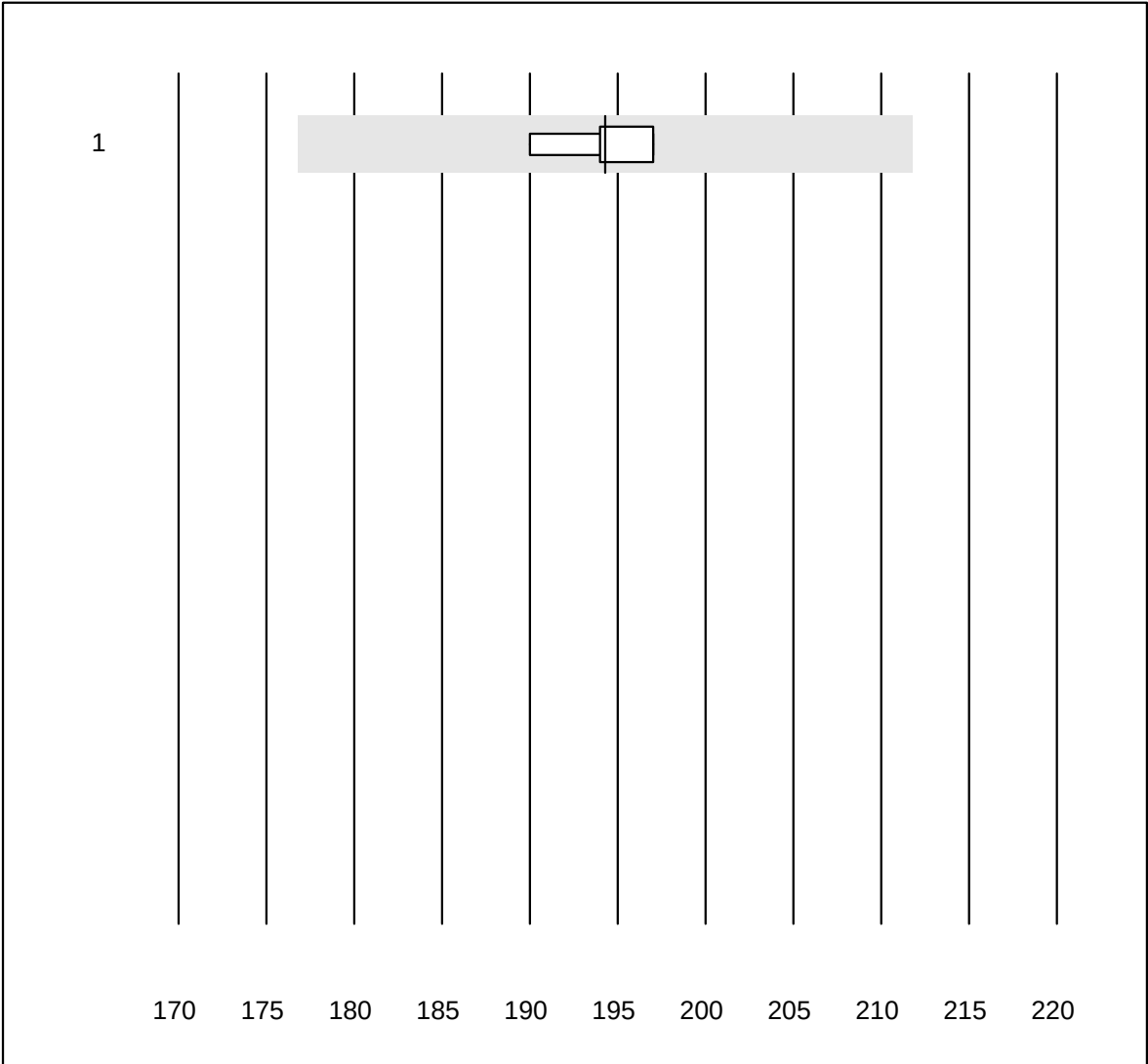


QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	14	100.0	0.0	0.0	194.3	1.2	e

Ematocrito

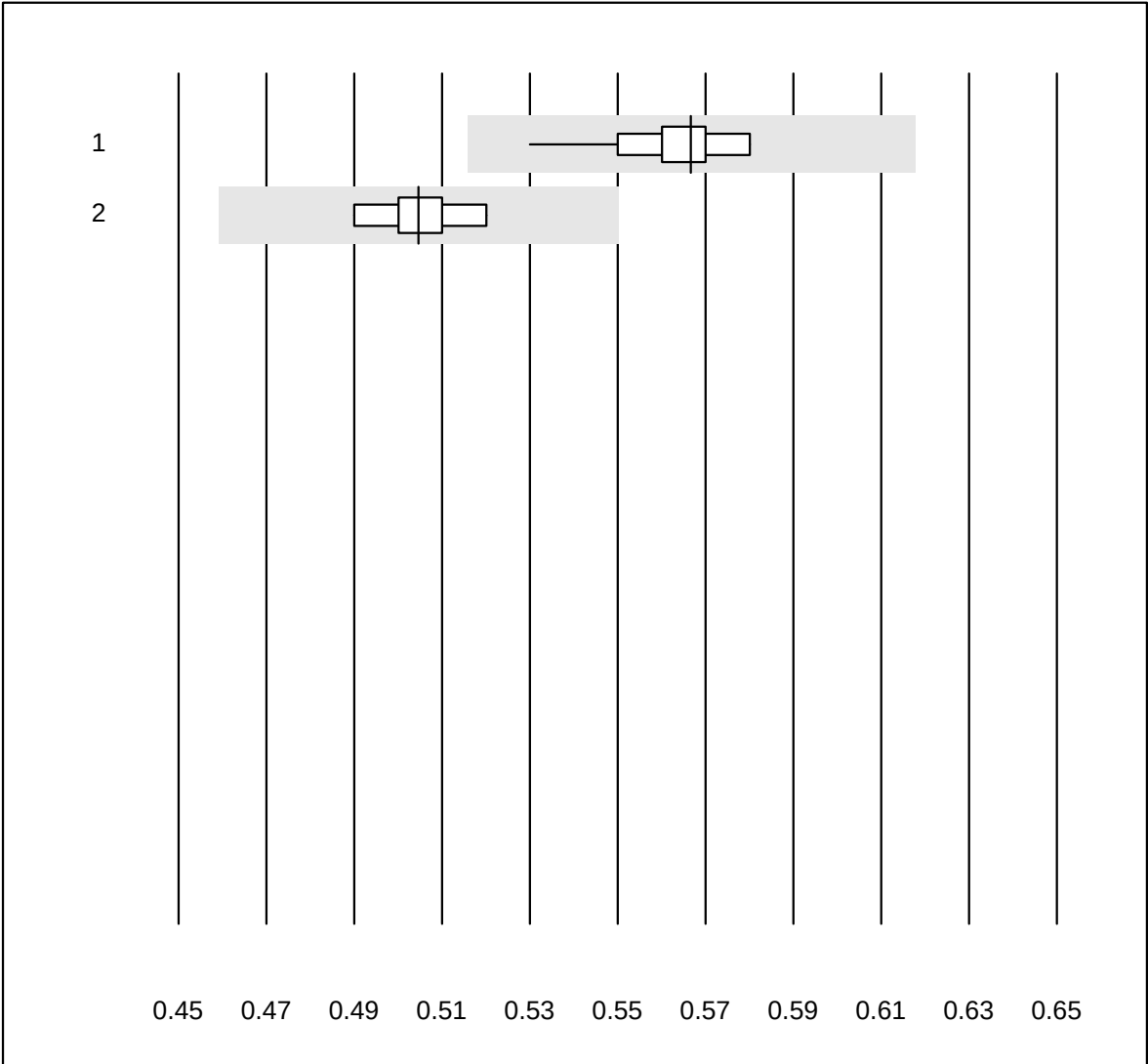


QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	19	94.7	0.0	5.3	0.57	2.3	e
2 EPOC	16	93.7	0.0	6.3	0.50	1.8	e


Emoglobina

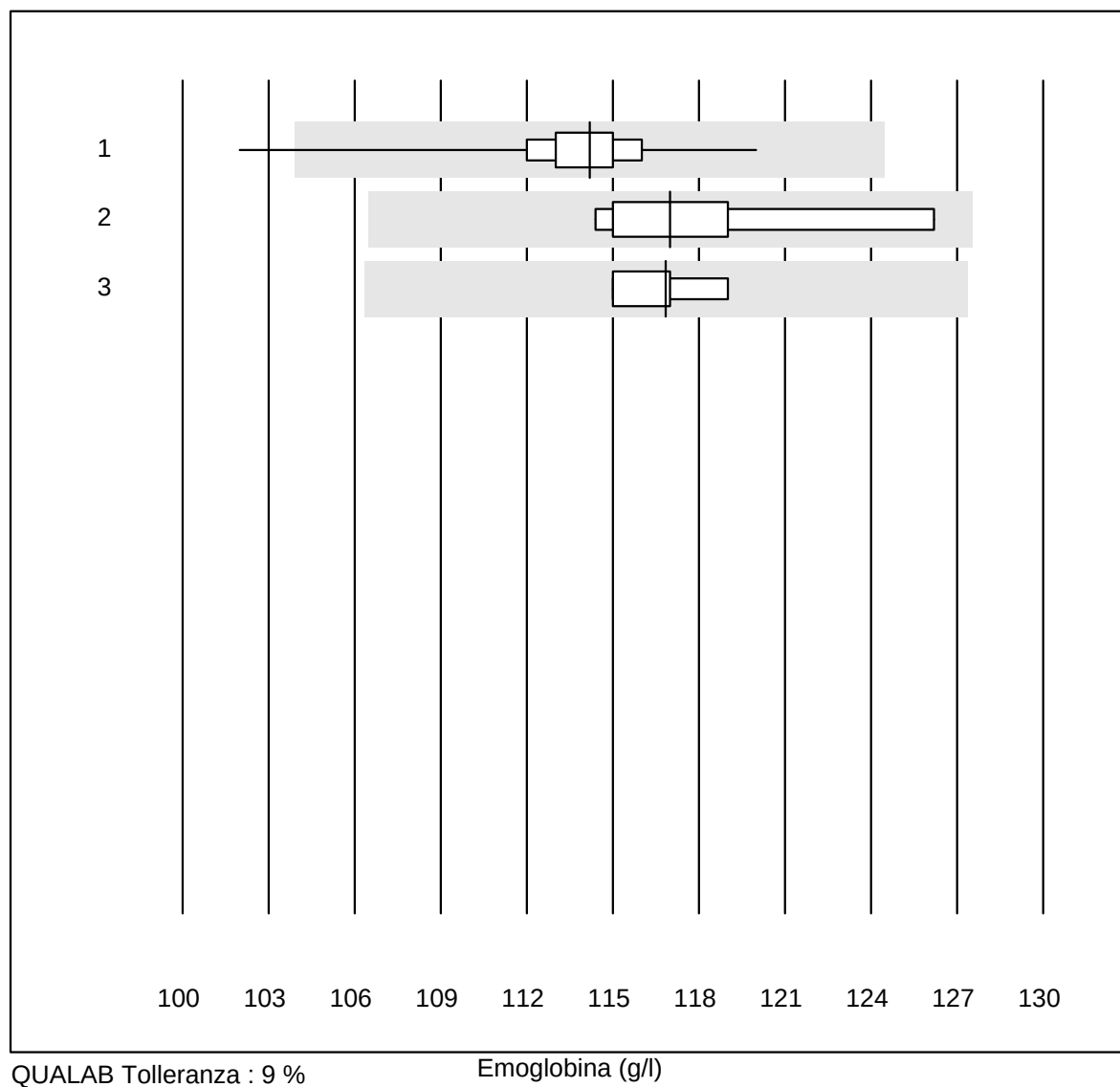

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	127	99.2	0.8	0.0	114.2	1.7	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	117.0	3.7	e*
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	116.8	1.2	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Ematocrito

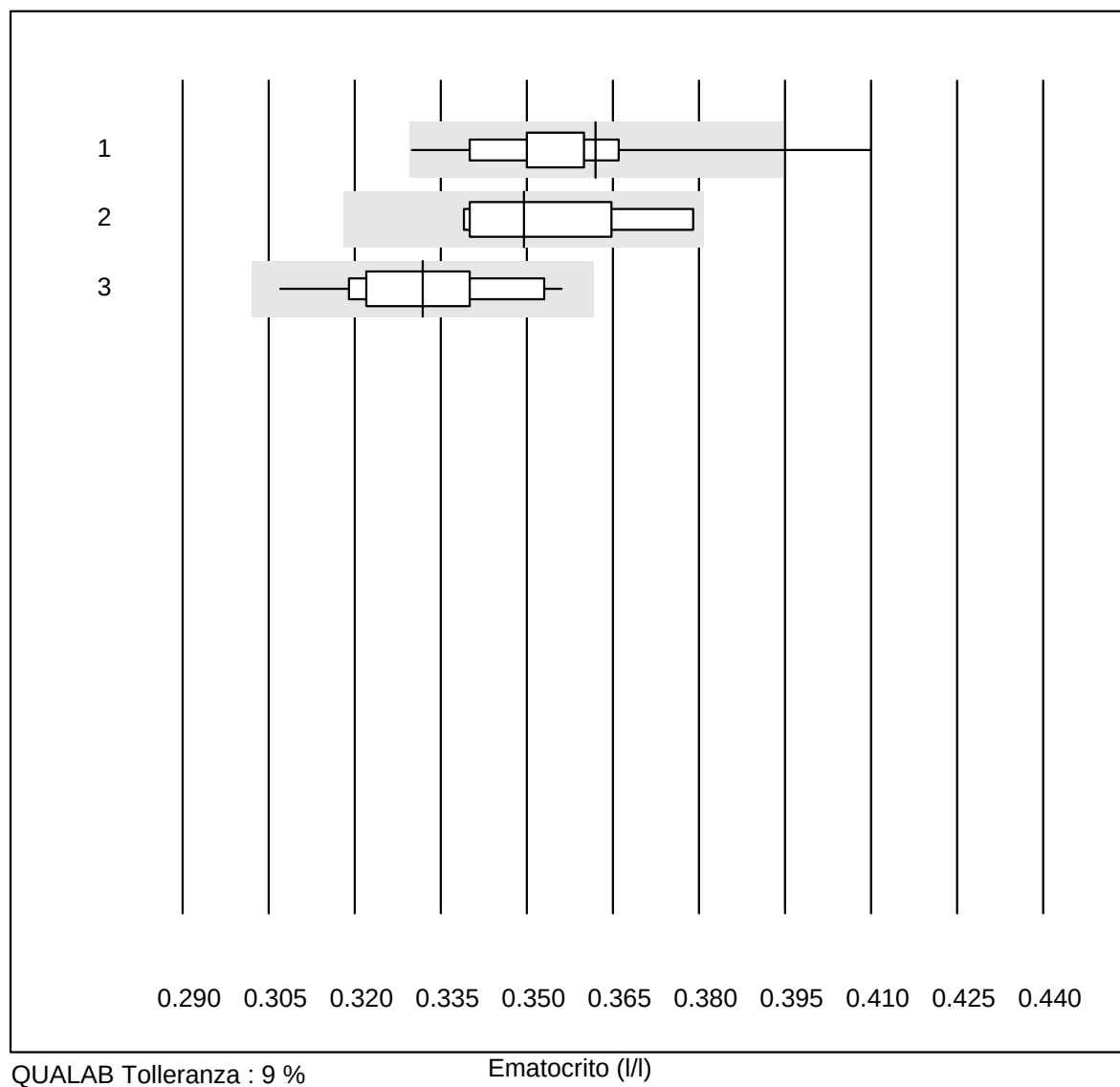


QUALAB Tolleranza : 9 %

Ematocrito (H/I)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	127	97.6	1.6	0.8	0.36	3.5	a
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	0.35	4.4	e*
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	0.33	4.2	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Eritrociti

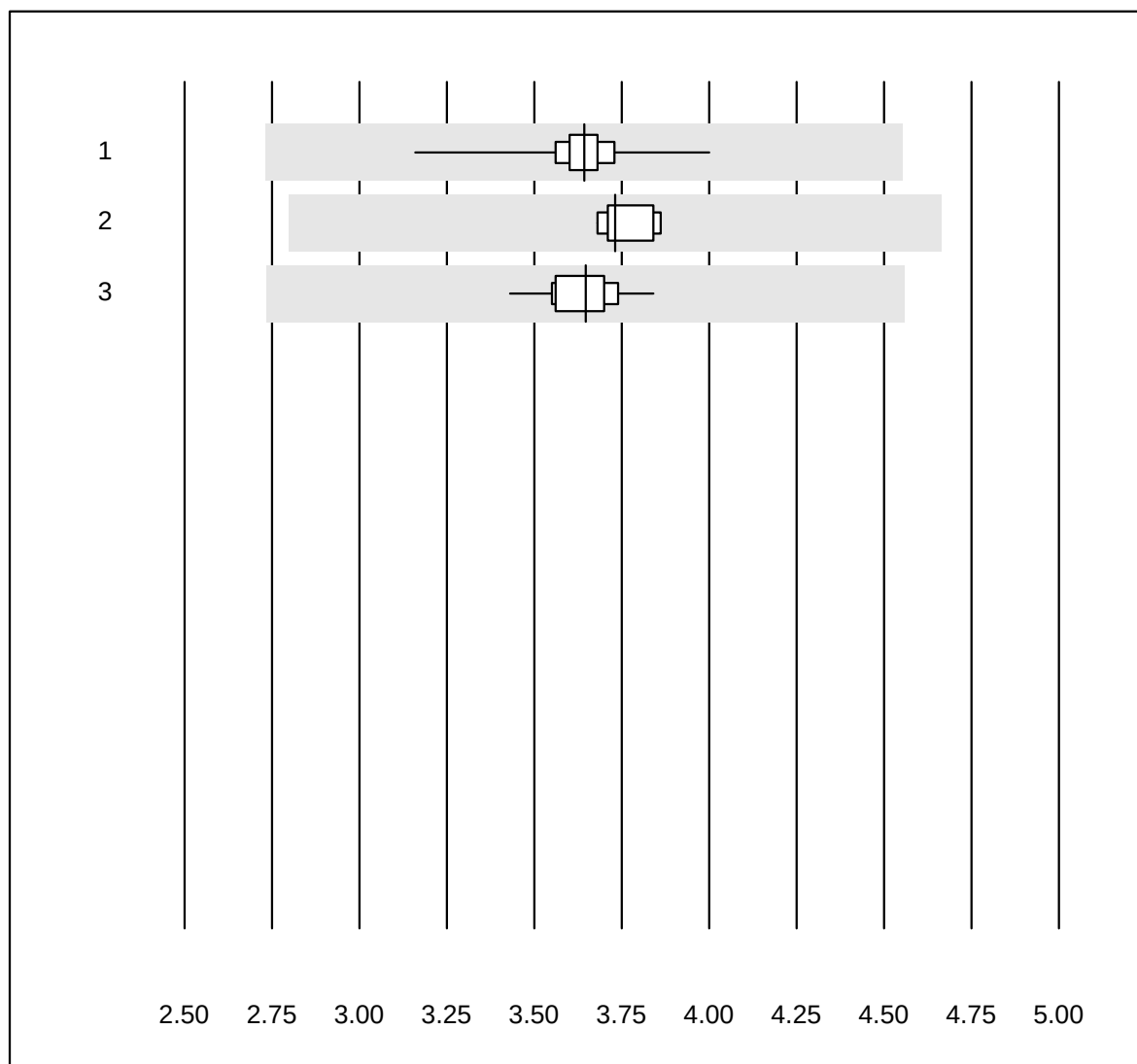


QUALAB Tolleranza : 25 %

Eritrociti (T/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	127	100.0	0.0	0.0	3.64	2.4	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	3.73	2.0	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	3.65	2.9	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Leucociti

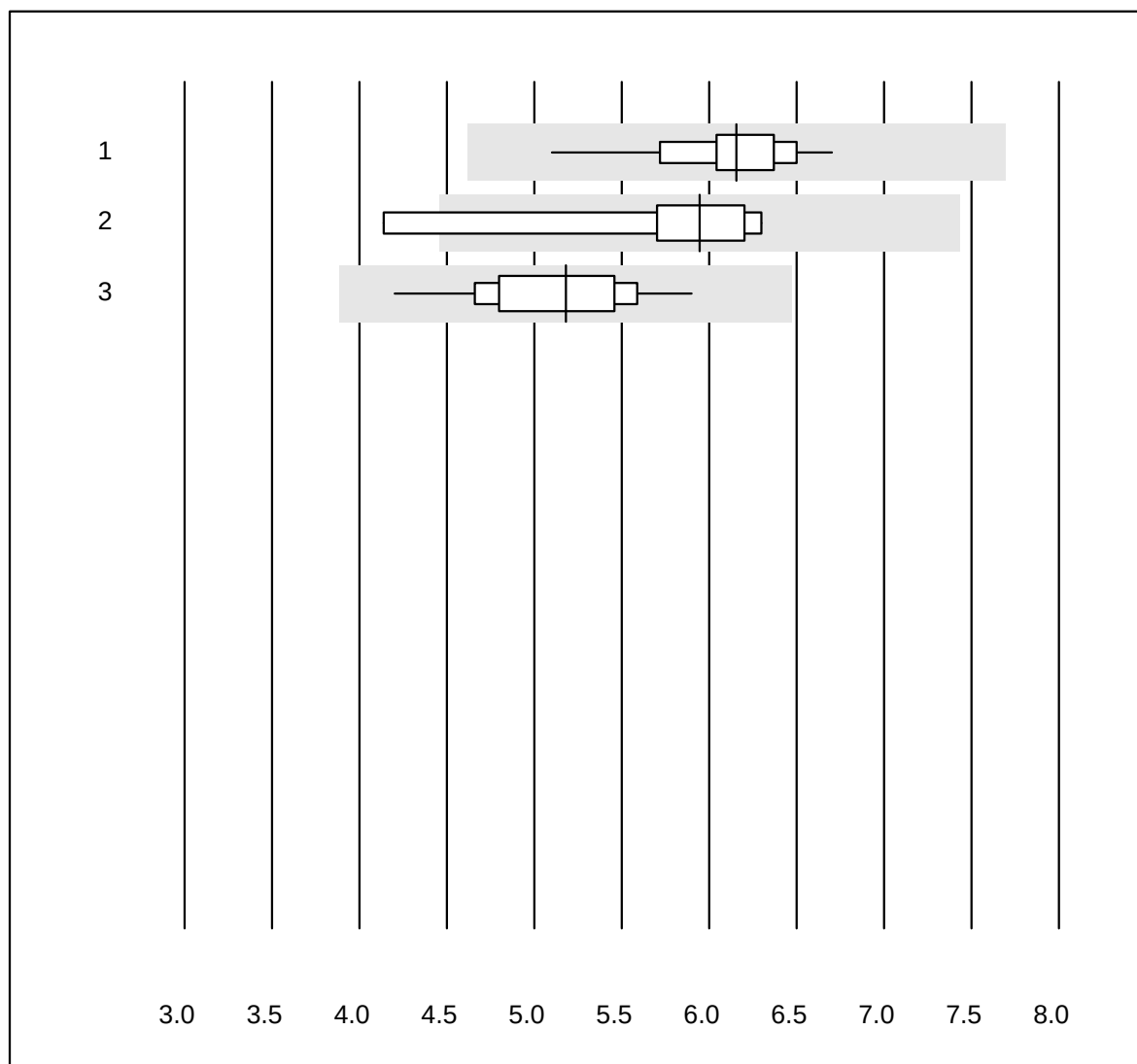


QUALAB Tolleranza : 25 %

Leucociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	126	100.0	0.0	0.0	6.16	5.1	e
2	Beckman	6	83.3	16.7	0.0	5.95	14.0	e*
3	Yumizen/Pentra	12	91.7	0.0	8.3	5.18	9.1	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Trombociti

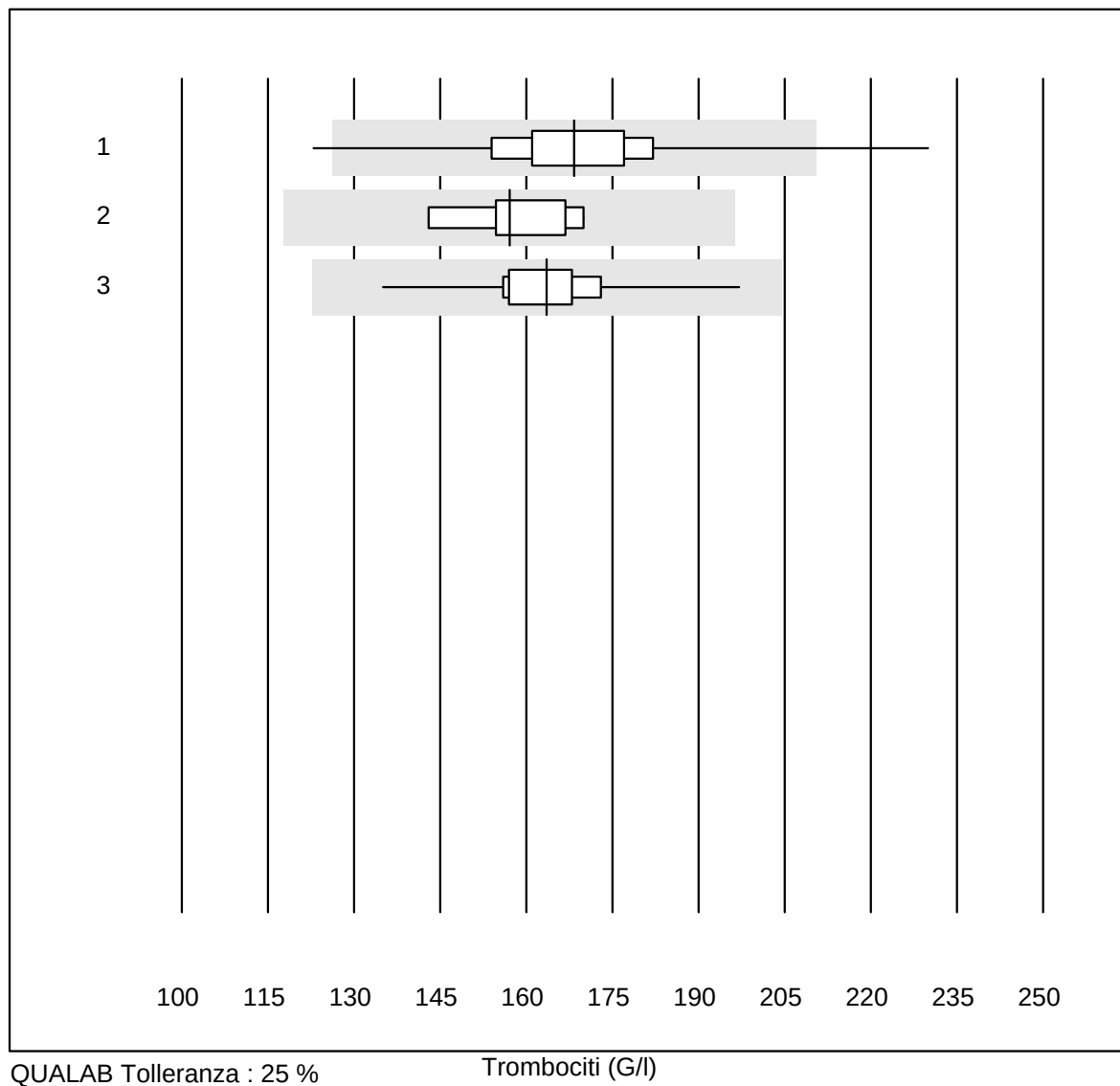


QUALAB Tolleranza : 25 %

Trombociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	127	96.0	2.4	1.6	168.3	8.1	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	157.1	6.1	e
3	Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	163.6	8.7	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Neutrofili

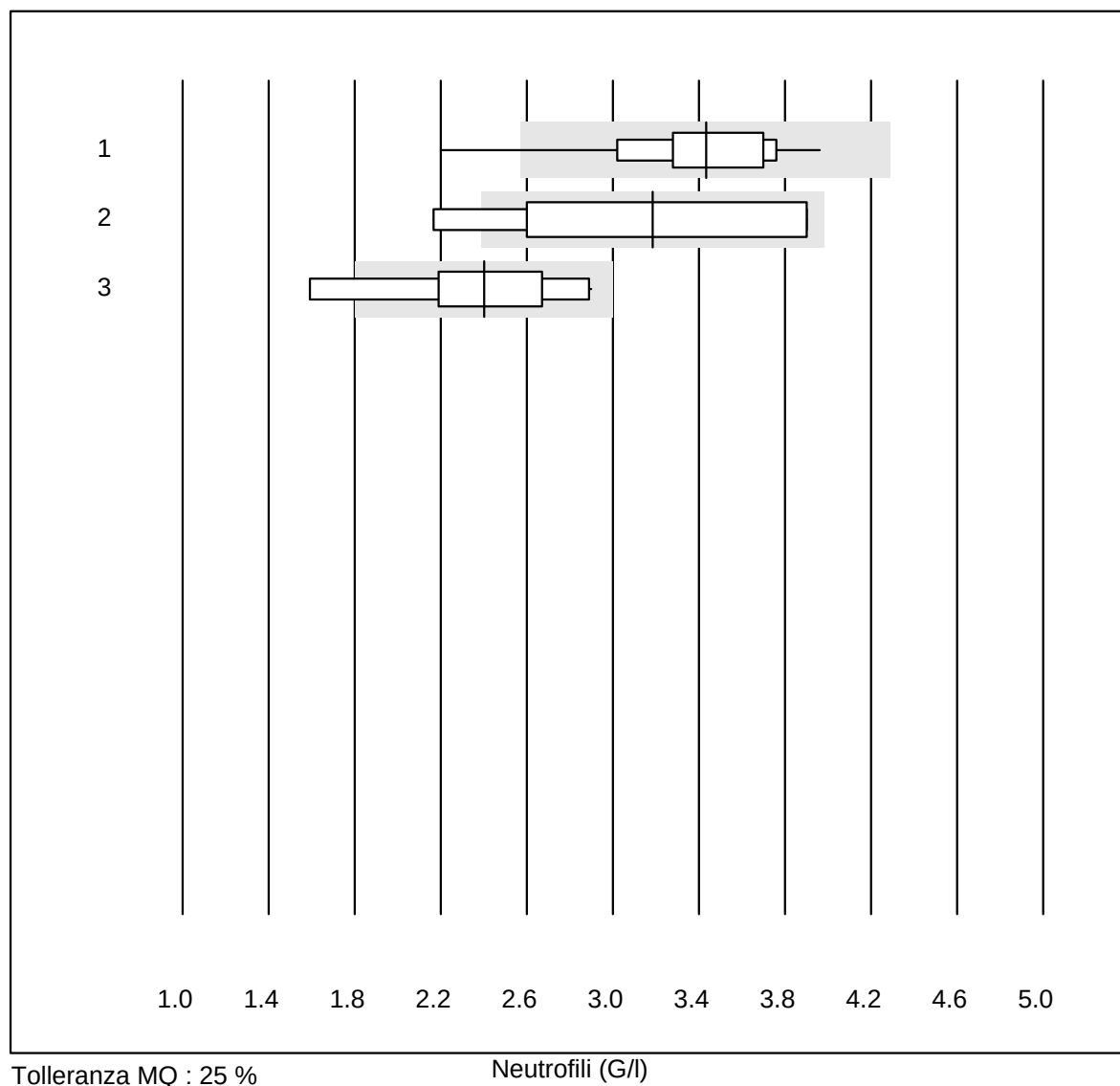


Tolleranza MQ : 25 %

Neutrofili (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	127	94.5	3.1	2.4	3.43	10.1	e
2	Beckman	6	83.3	16.7	0.0	3.18	23.2	e*
3	Yumizen/Pentra	11	72.7	18.2	9.1	2.40	18.3	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Linfociti

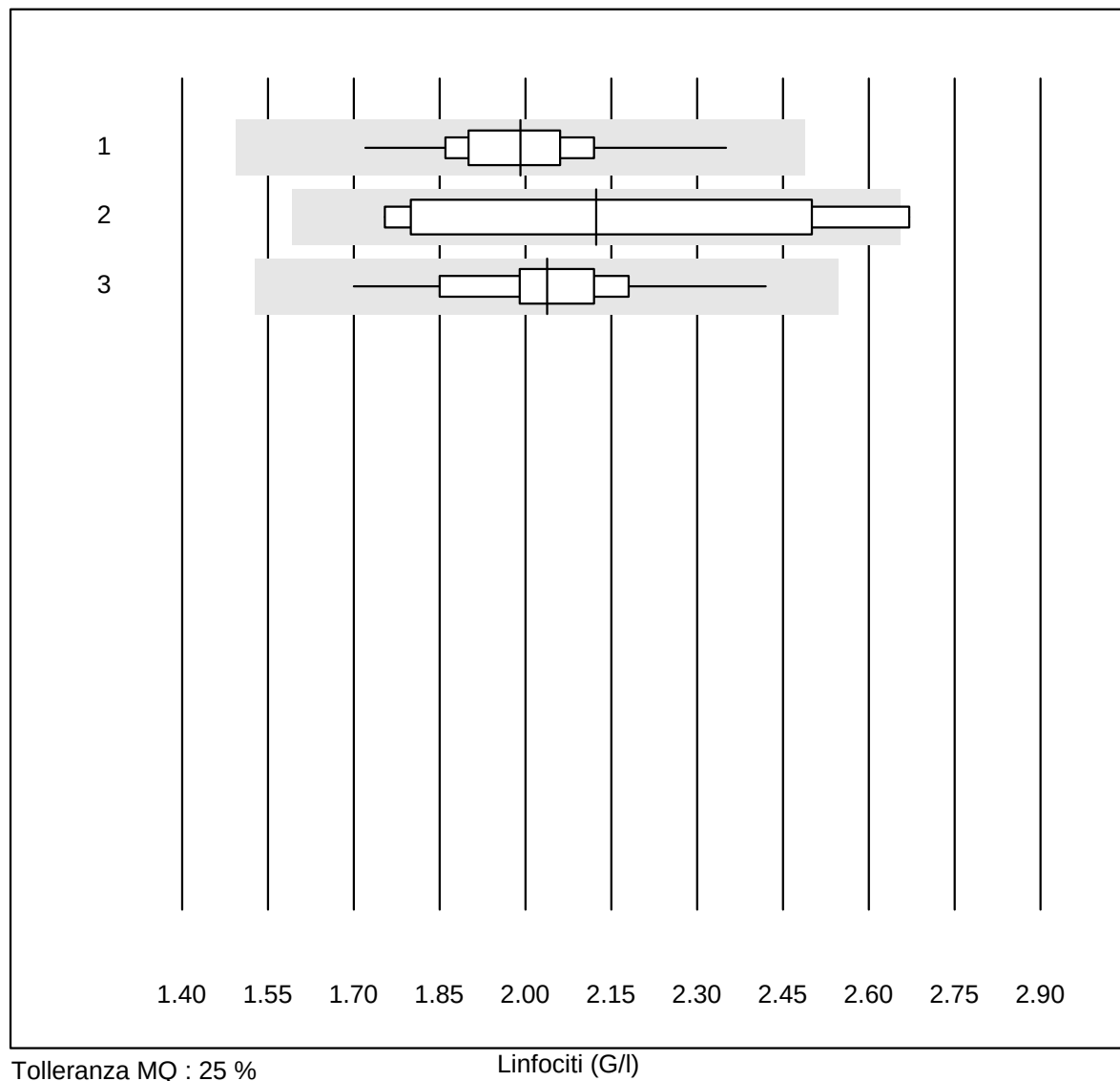


Tolleranza MQ : 25 %

Linfociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	127	99.2	0.0	0.8	1.99	5.7	e
2	Beckman	6	66.6	16.7	16.7	2.12	20.1	a
3	Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	2.04	8.9	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Monociti

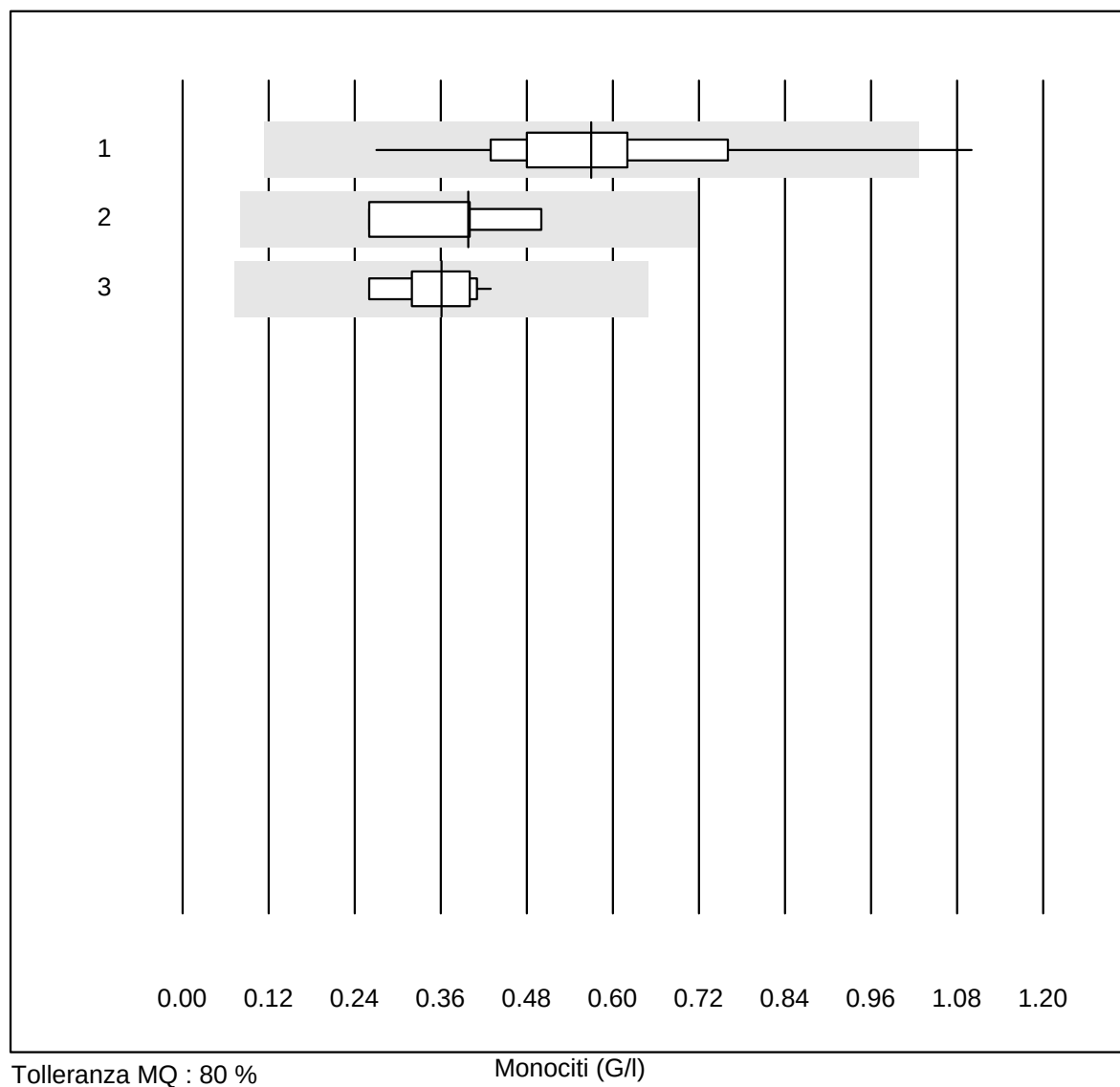


Tolleranza MQ : 80 %

Monociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	126	96.8	0.8	2.4	0.57	25.6	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	0.40	25.3	e*
3	Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	0.36	15.3	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Eosinofili

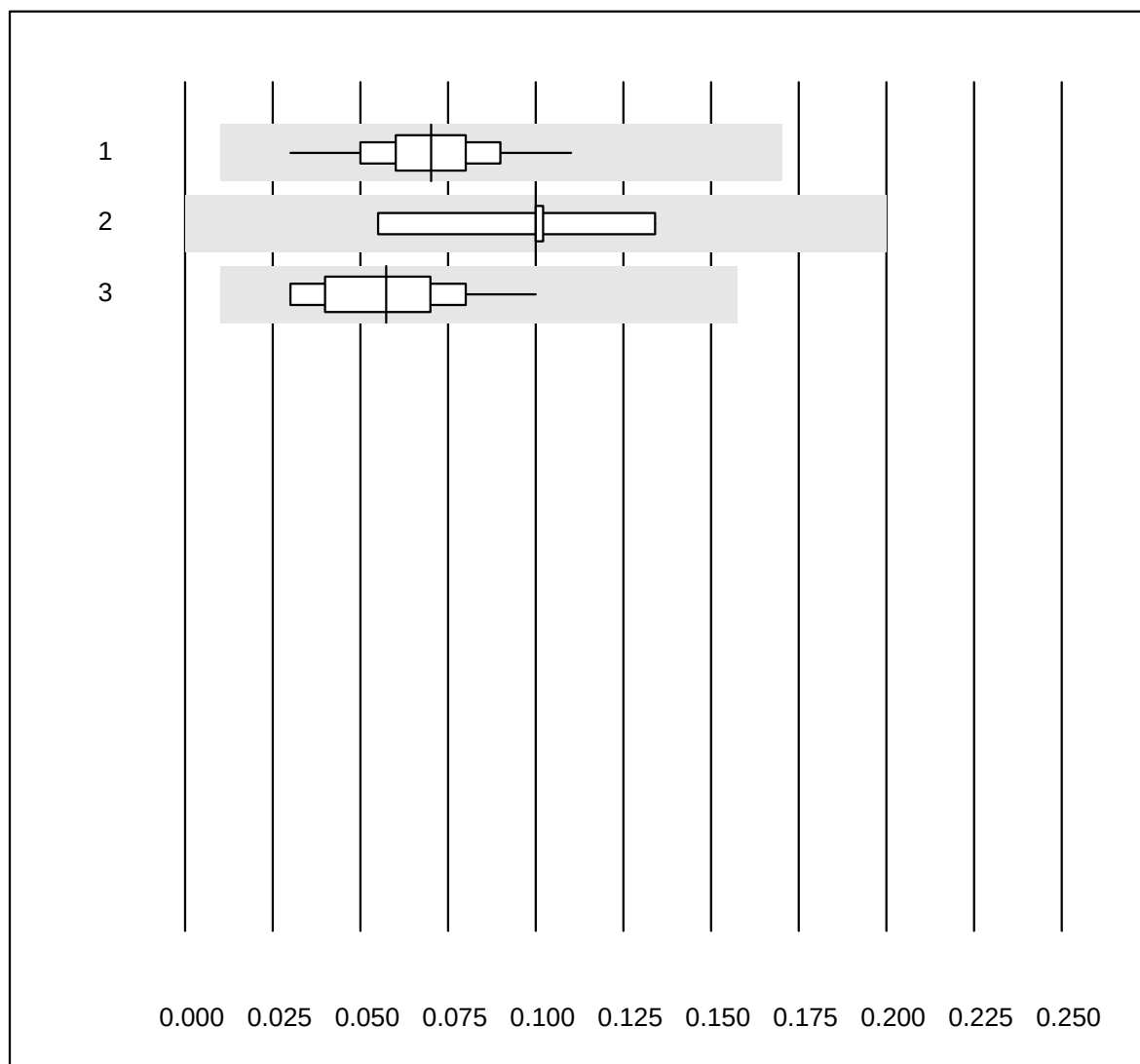


Tolleranza MQ : 80 %
(< 0.13: +/- 0.10 G/l)

Eosinofili (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	126	100.0	0.0	0.0	0.07	22.6	e
2	Beckman	6	100.0	0.0	0.0	0.10	25.6	e*
3	Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	0.06	38.3	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Basofili

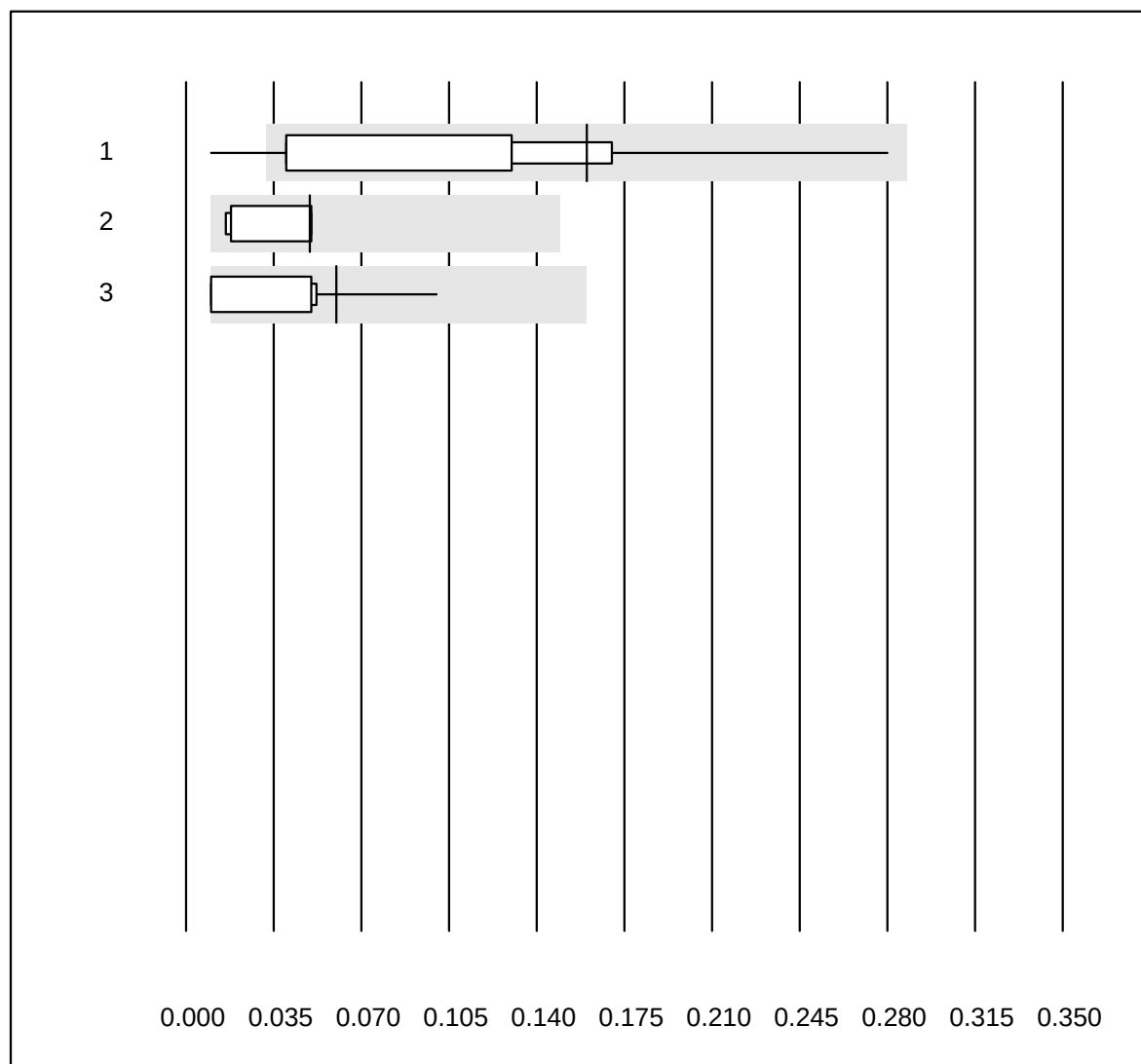


Tolleranza MQ : 80 %
(< 0.13: +/- 0.10 G/l)

Basofili (G/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	126	98.4	1.6	0.0	0.16	63.3	a
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	0.05	43.6	e*
3 Yumizen/Pentra	11	90.9	0.0	9.1	0.06	66.4	a

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

MCV

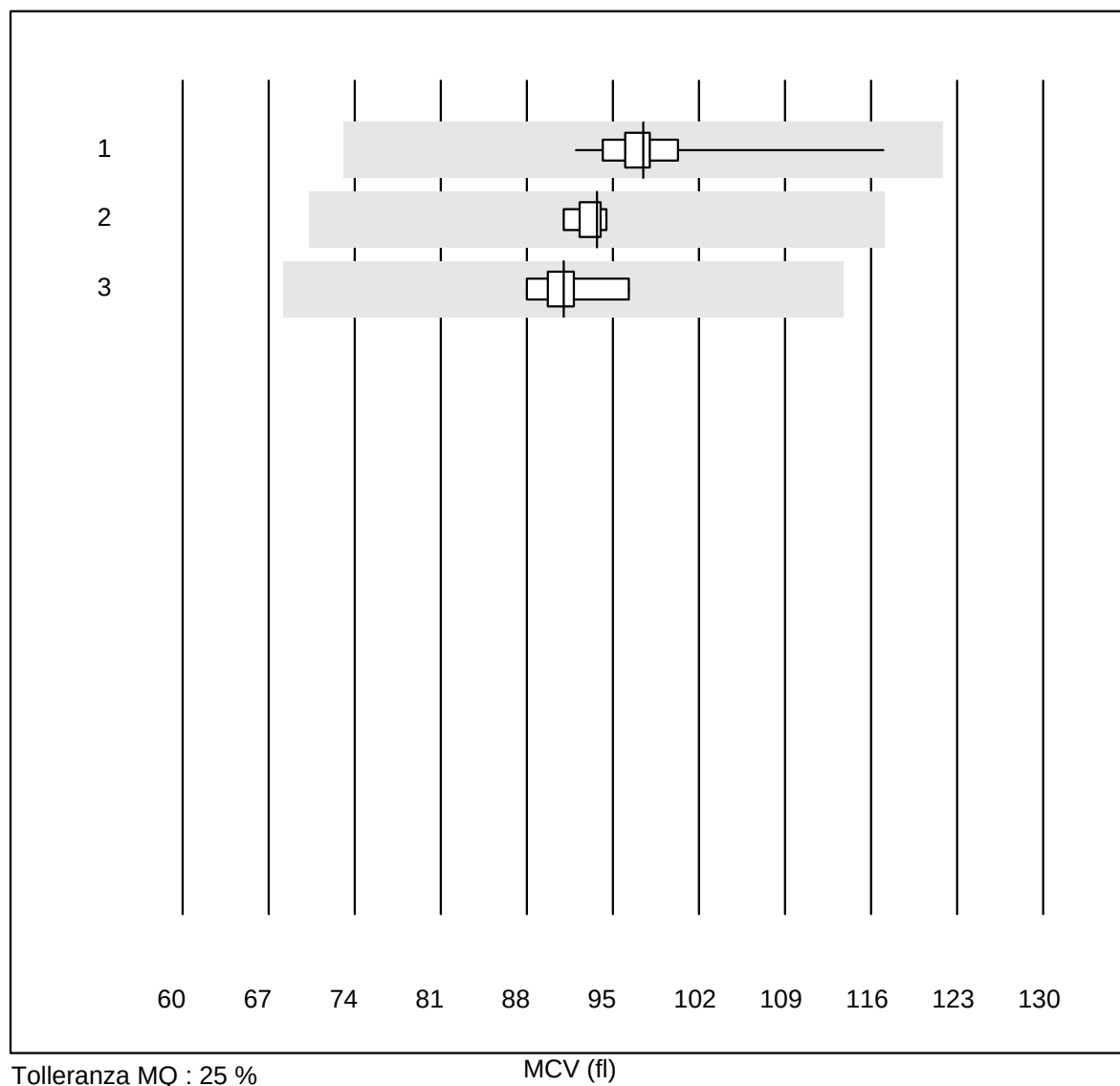


Tolleranza MQ : 25 %

MCV (fl)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	117	100.0	0.0	0.0	97.5	3.7	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	93.7	1.5	e
3	Yumizen/Pentra	8	100.0	0.0	0.0	91.0	2.7	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

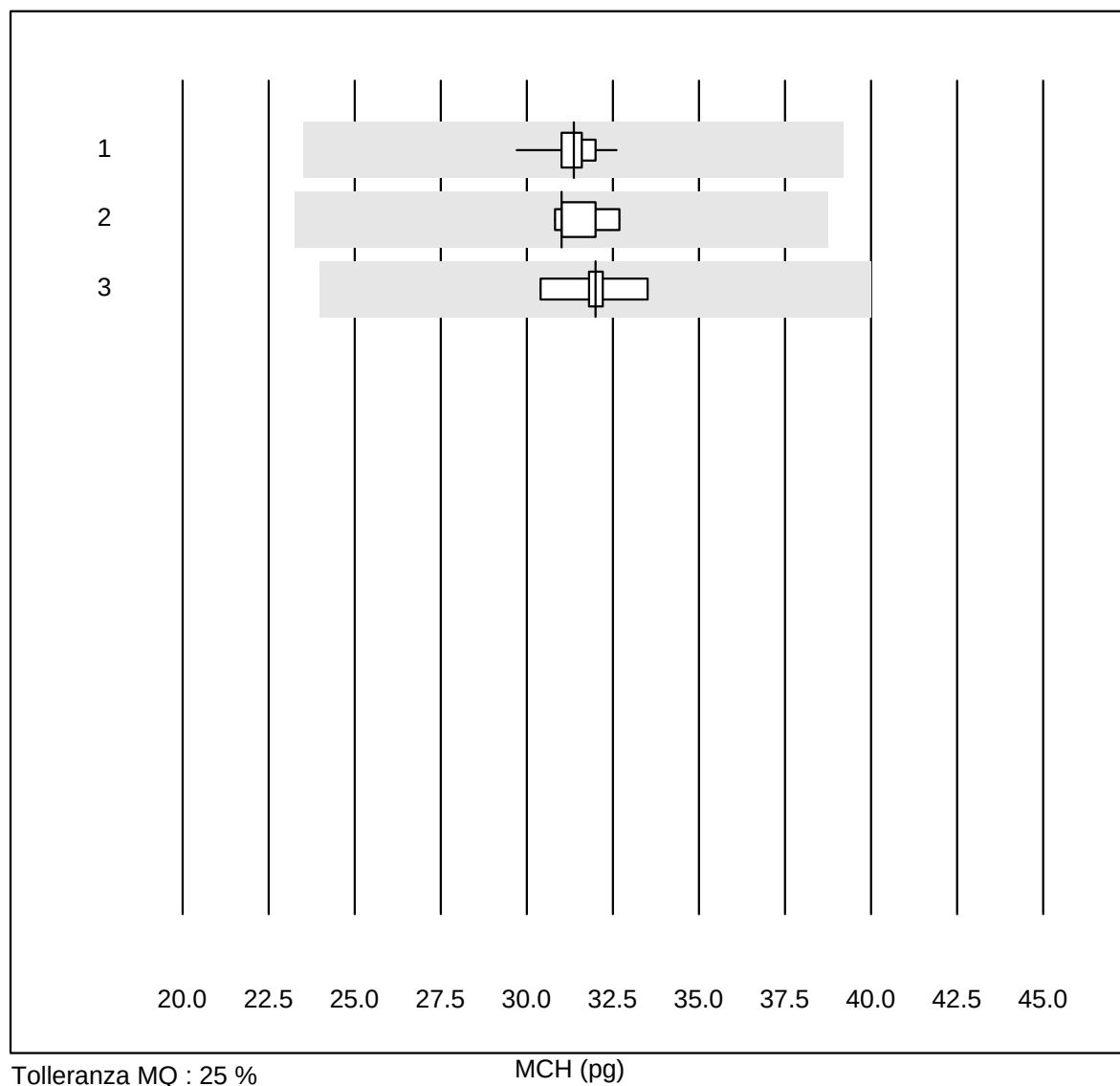MCH


Tolleranza MQ : 25 %

MCH (pg)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	117	100.0	0.0	0.0	31.4	1.6	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	31.0	2.6	e
3	Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	32.0	2.9	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

MCHC

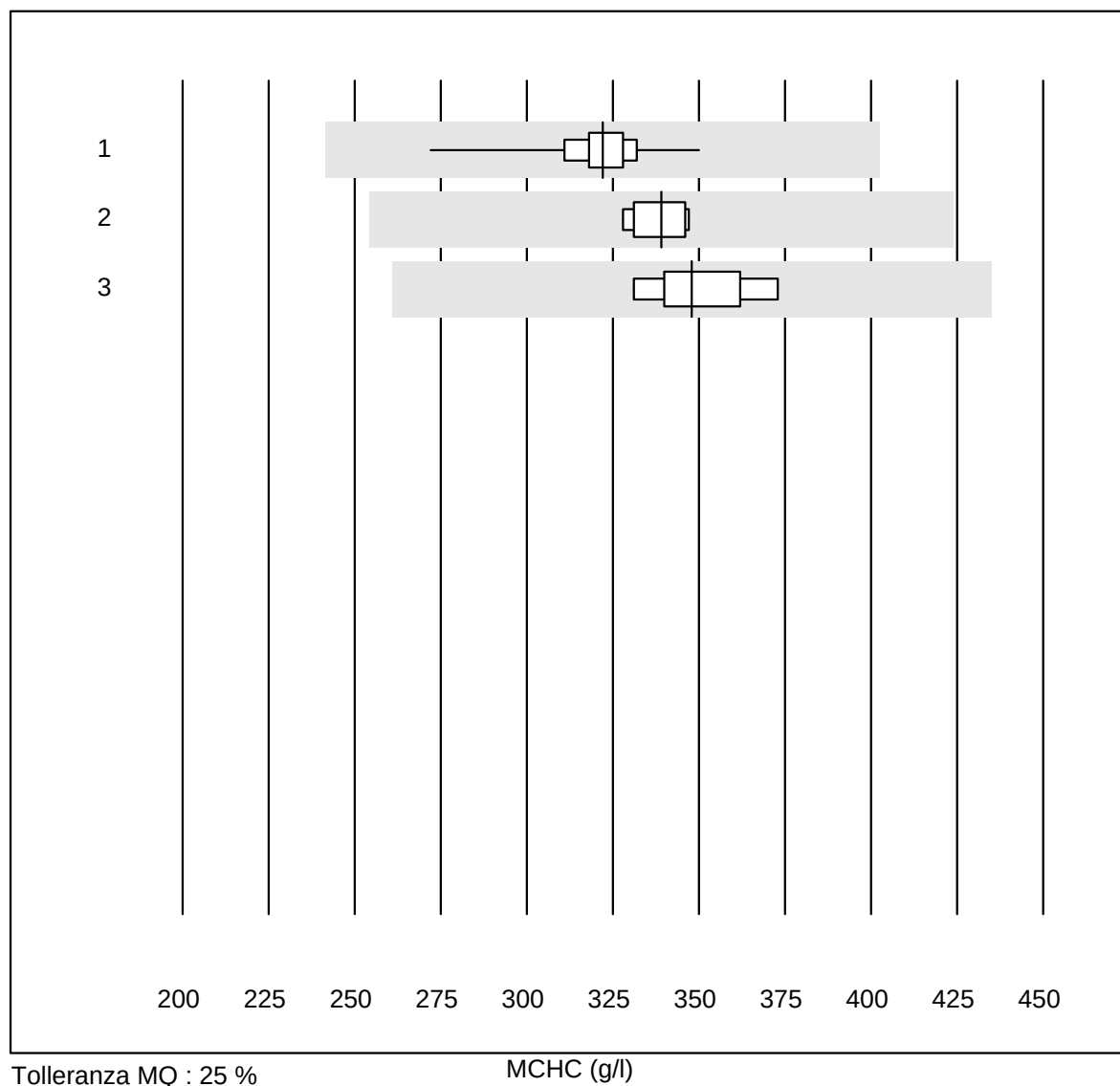


Tolleranza MQ : 25 %

MCHC (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	118	100.0	0.0	0.0	322	3.4	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	339	2.5	e
3	Yumizen/Pentra	9	100.0	0.0	0.0	348	4.1	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

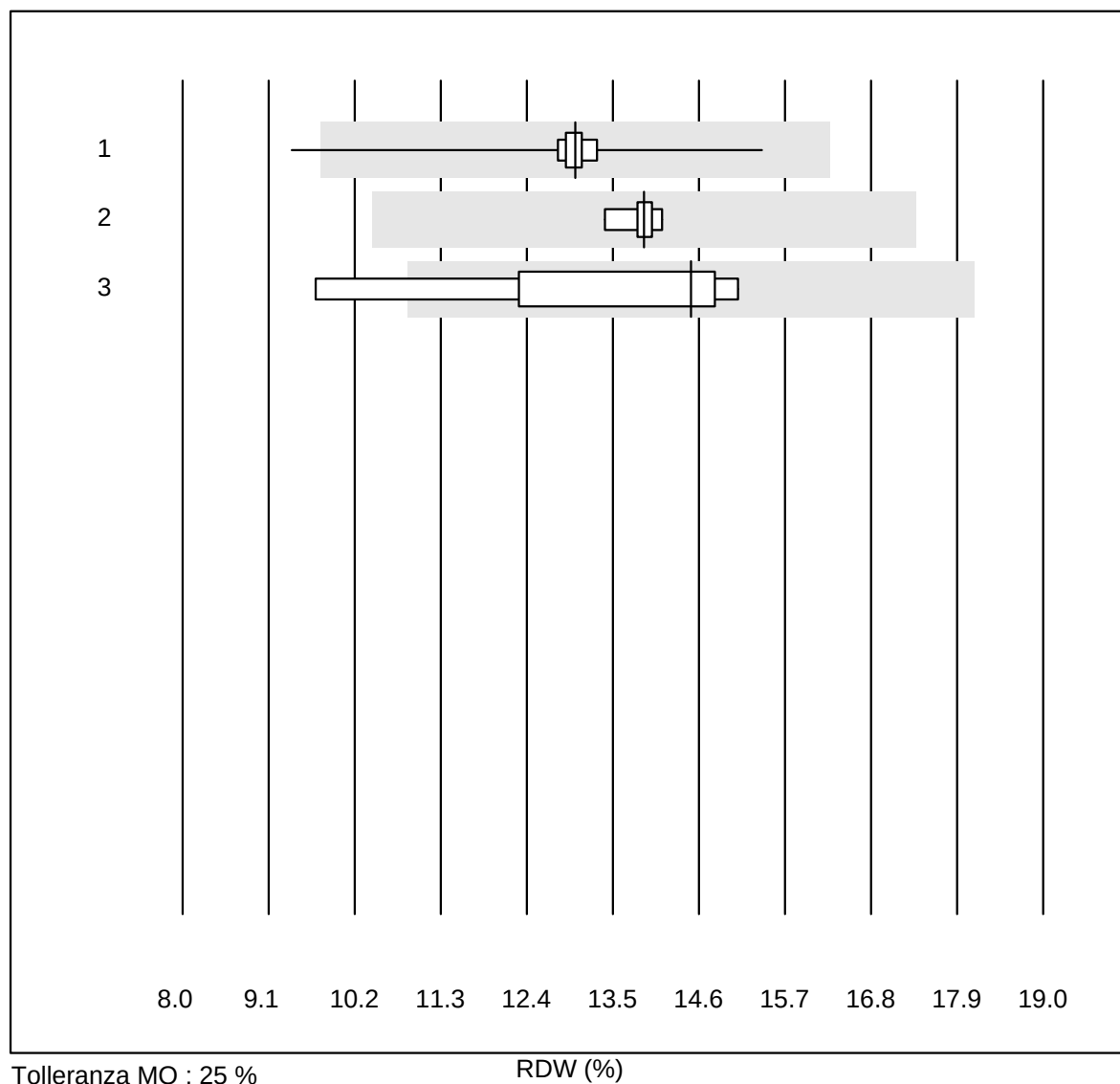RDW


Tolleranza MQ : 25 %

RDW (%)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	112	99.1	0.9	0.0	13.0	3.8	e
2	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	13.9	2.0	e
3	Yumizen/Pentra	9	88.9	11.1	0.0	14.5	13.8	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Granulociti immaturi

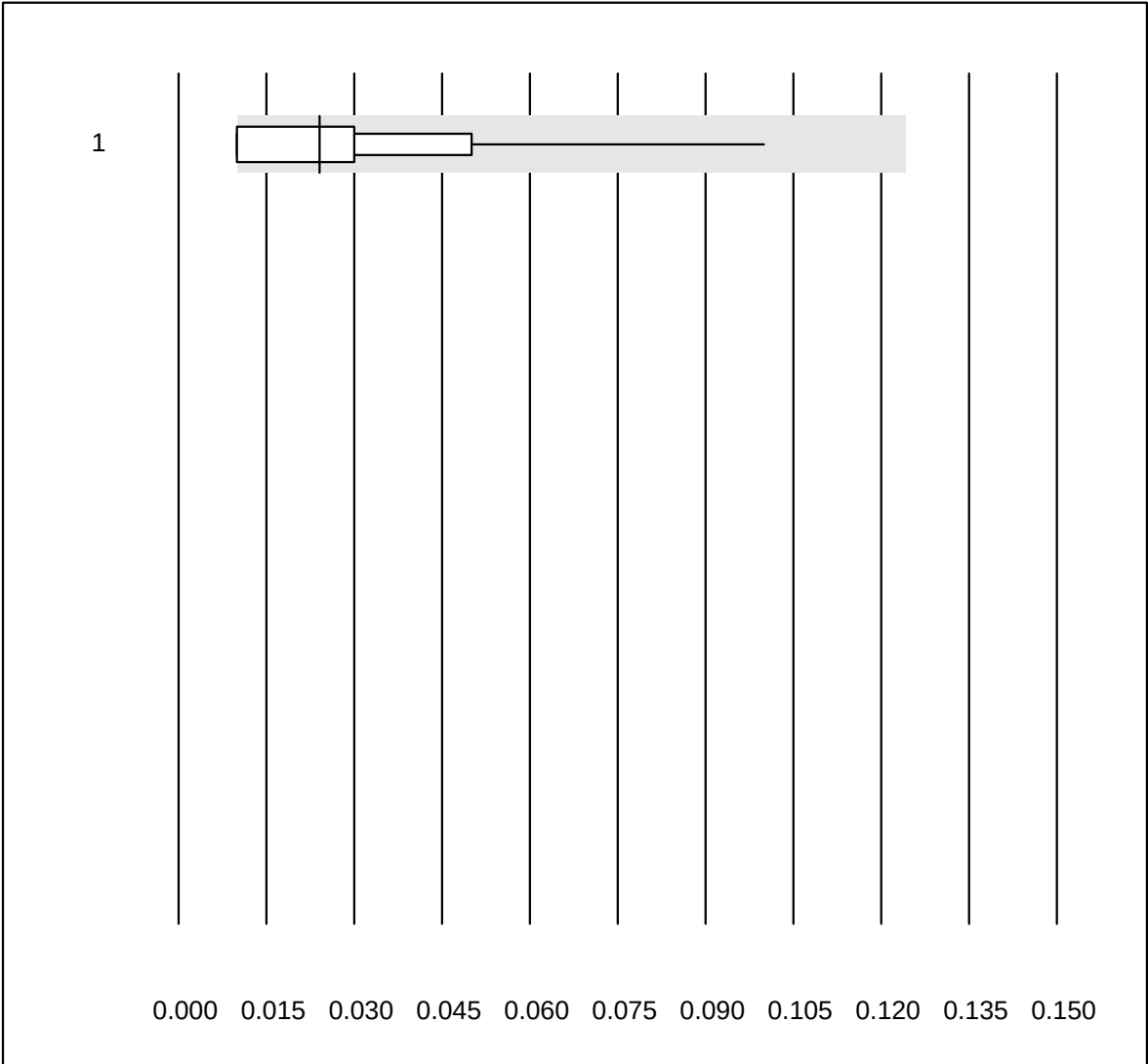


Tolleranza MQ : 25 %
(< 1.30: +/- 0.10 G/l)

Granulociti immaturi (G/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	109	100.0	0.0	0.0	0.02	77.6	e*

Reticolociti

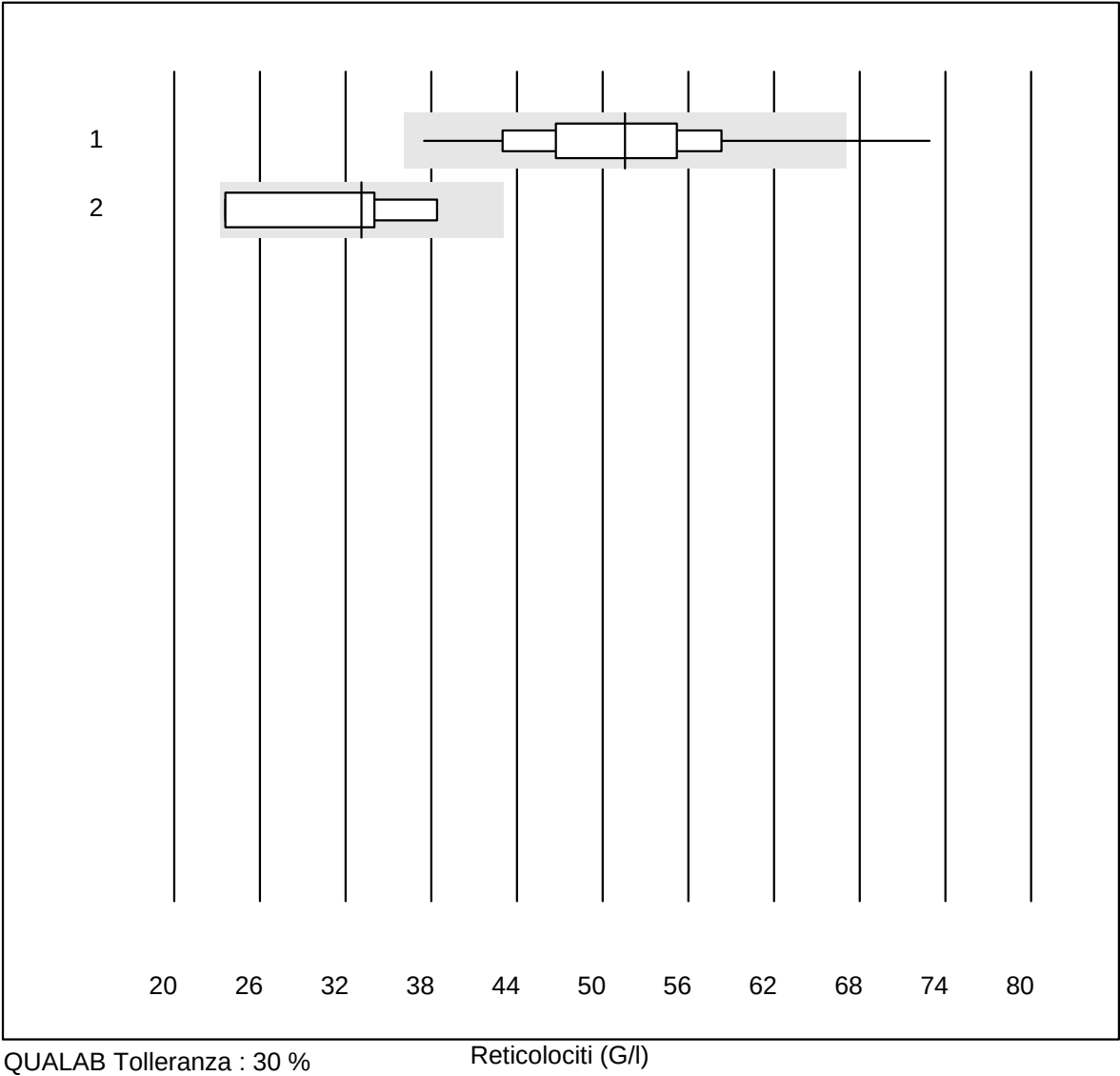


QUALAB Tolleranza : 30 %

Reticolociti (G/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	69	97.2	1.4	1.4	51.6	12.8	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	33.1	19.4	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Indice emolitico campione A

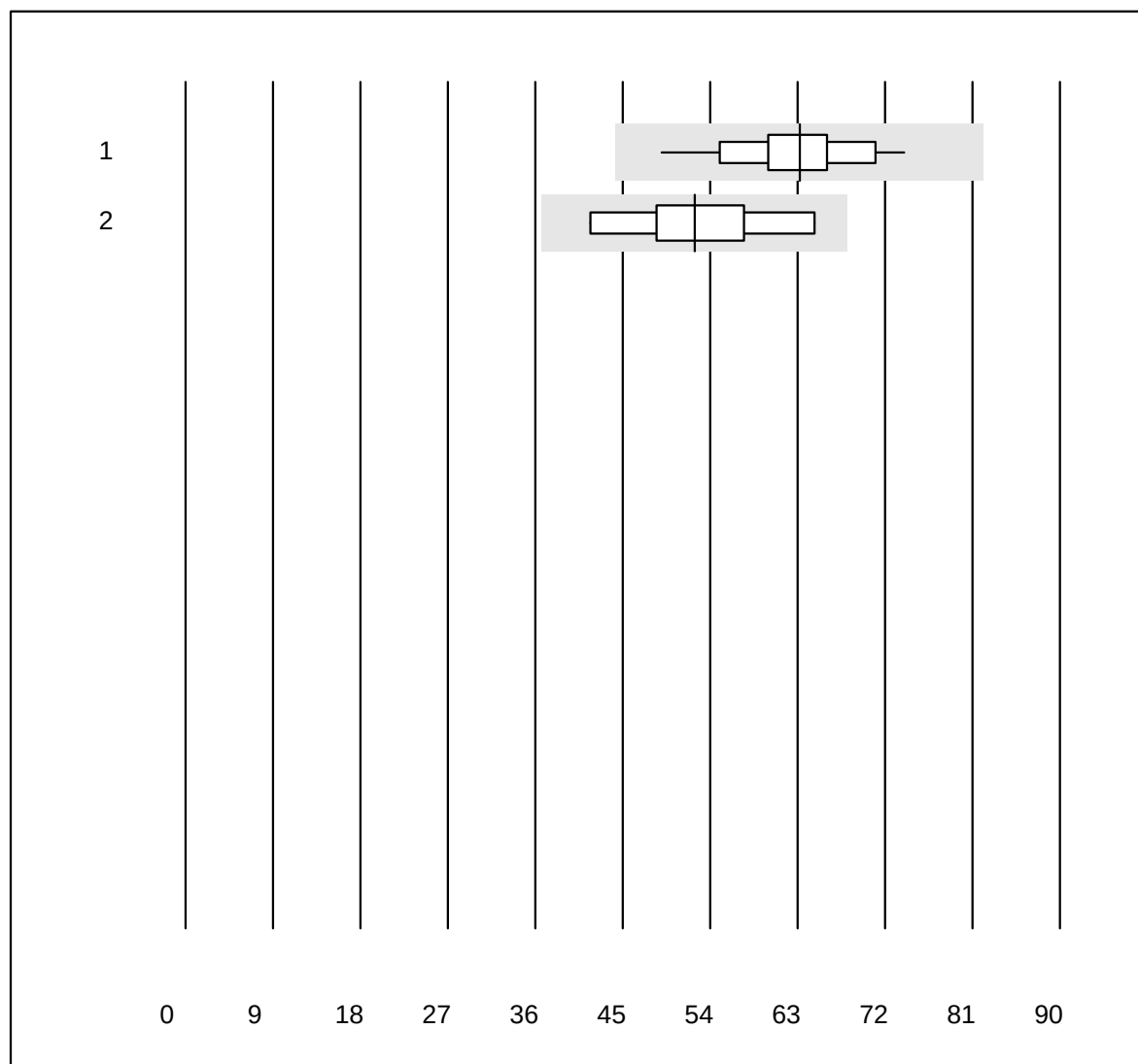


Tolleranza MQ : 30 %

Indice emolitico campione A (Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	24	100.0	0.0	0.0	63.208	9.4	e
2 Atellica	6	100.0	0.0	0.0	52.393	14.7	a

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Indice emolitico campione B

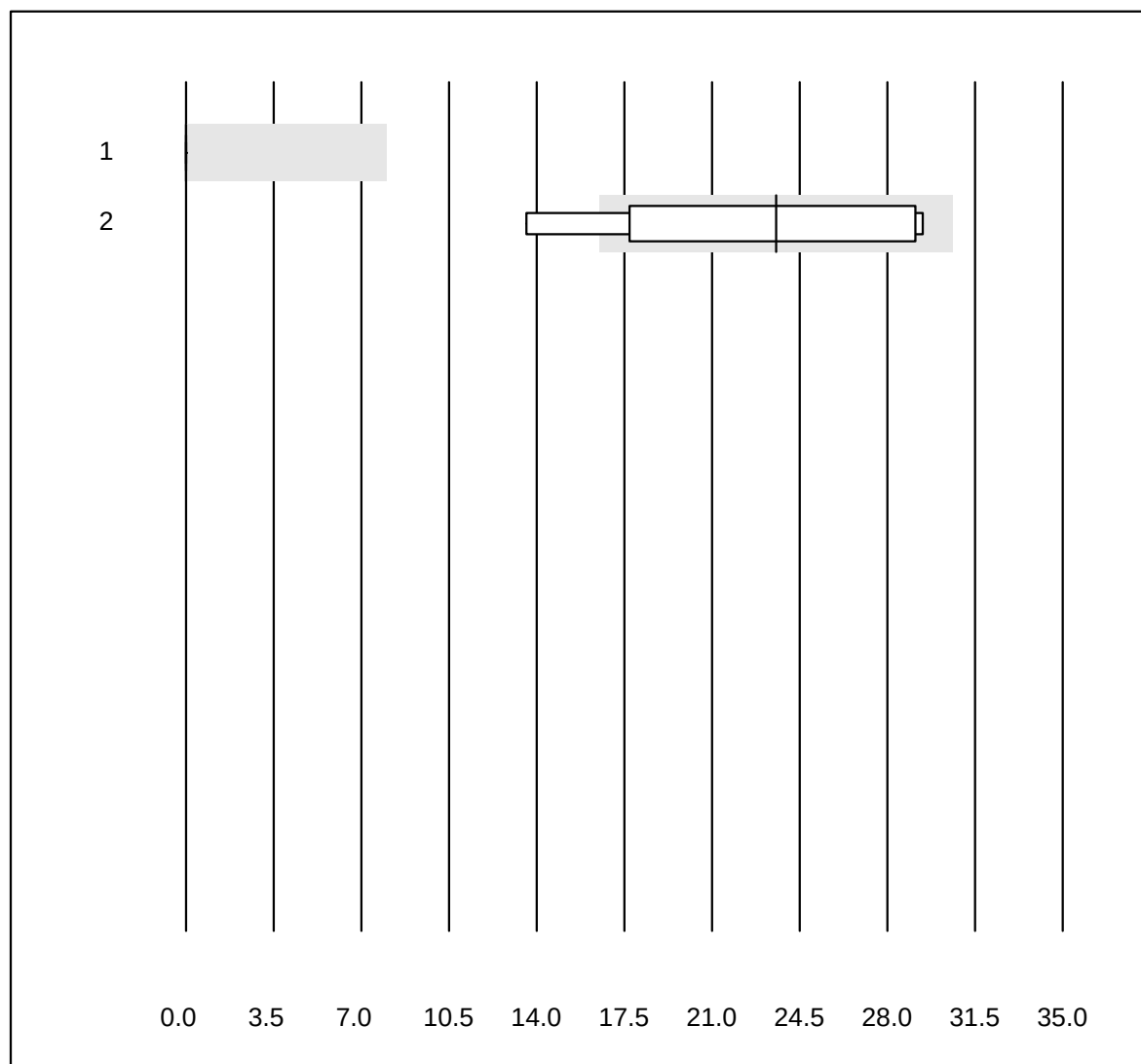


Tolleranza MQ : 30 % Indice emolitico campione B (Index (mg/))
 (< 20.000: +/- 8.000 Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	23	100.0	0.0	0.0	0.010	0.0	e
2 Atellica	6	83.3	16.7	0.0	23.560	28.5	a

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Indice di lipemia A

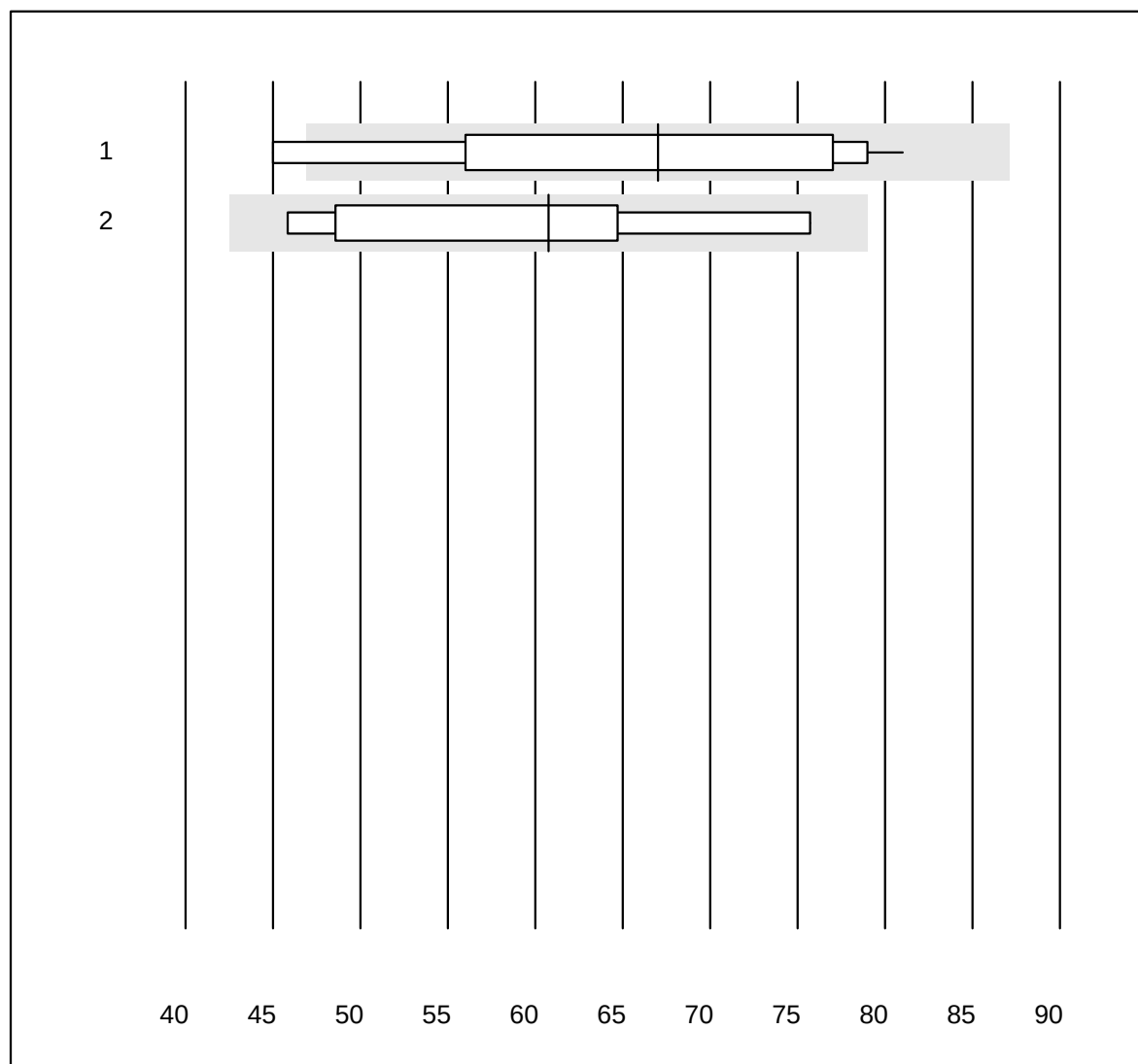


Tolleranza MQ : 30 %

Indice di lipemia A (Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	11	81.8	9.1	9.1	67.00	19.2	e*
2 Atellica	5	100.0	0.0	0.0	60.75	22.6	a

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice di lipemia B

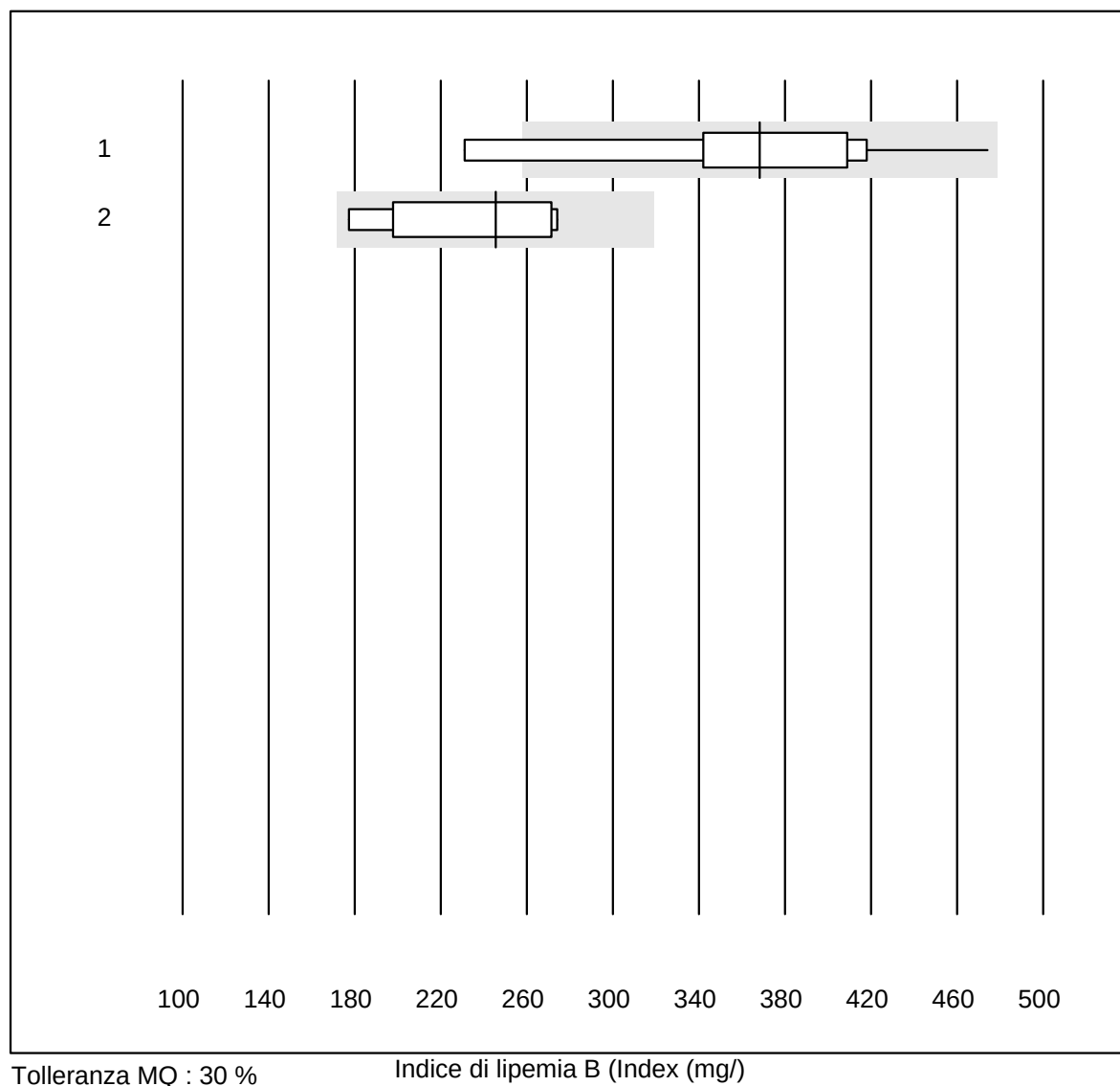


Tolleranza MQ : 30 %

Indice di lipemia B (Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	11	81.8	9.1	9.1	368.40	19.5	e*
2 Atellica	5	100.0	0.0	0.0	245.40	18.7	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


Indice itterico A

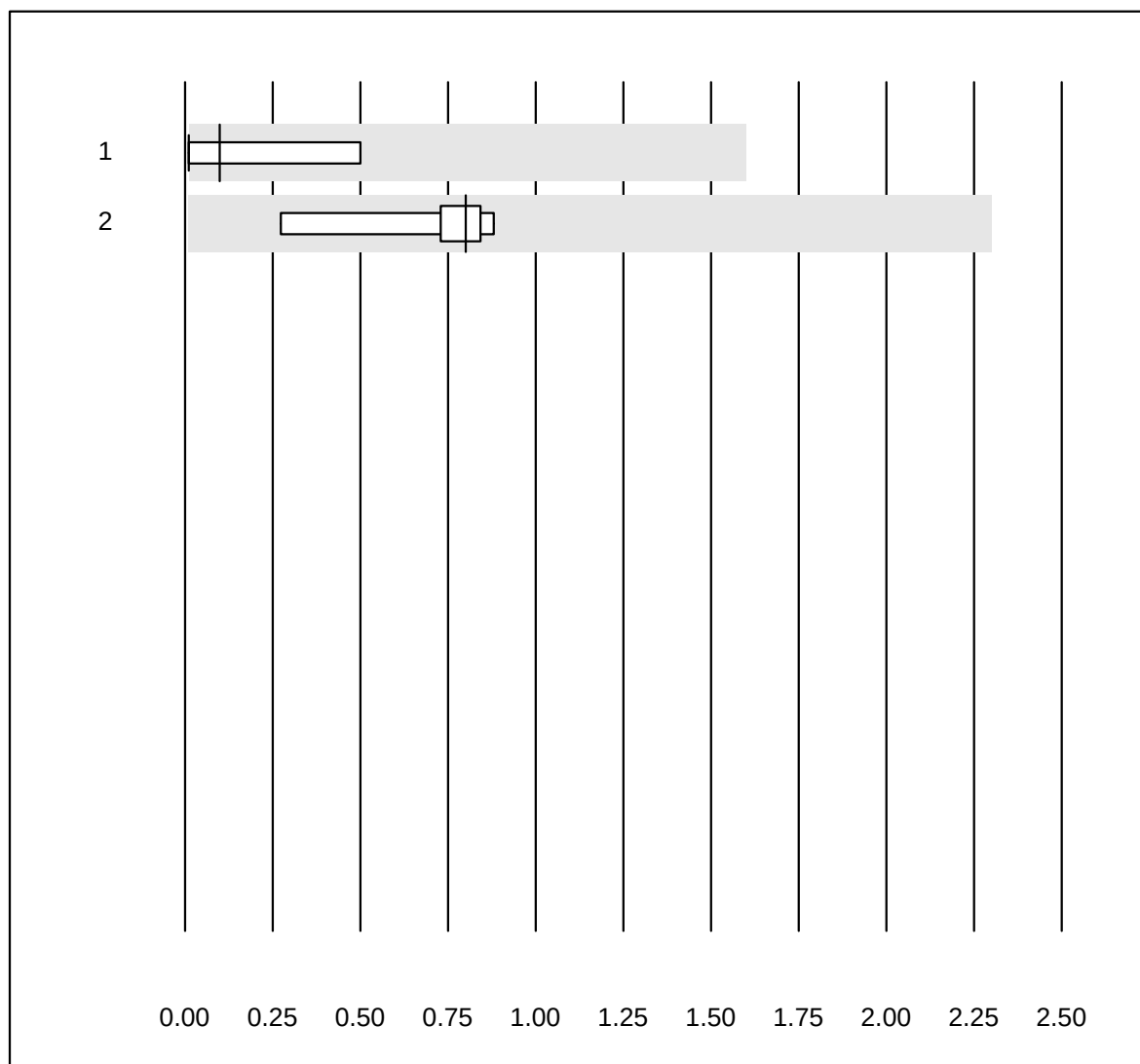

Tolleranza MQ : 30 %
 (< 5.00: +/- 1.50 Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	0.10	200.0	e*
2 Atellica	5	100.0	0.0	0.0	0.80	35.1	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

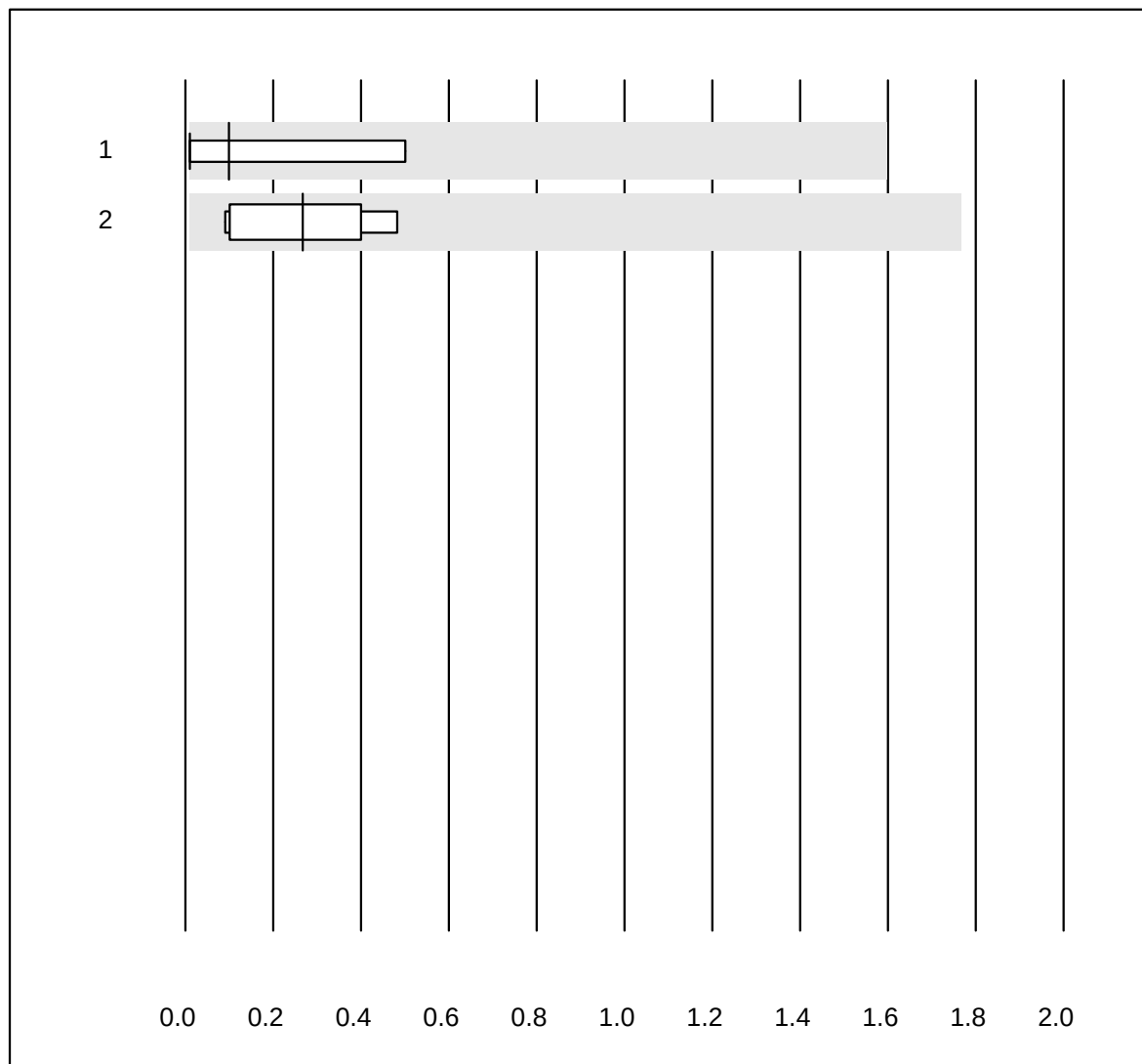
Indice itterico B

Tolleranza MQ : 30 %
(< 5.00: +/- 1.50 Index (mg/))

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	11	100.0	0.0	0.0	0.10	200.0	e*
2 Atellica	5	100.0	0.0	0.0	0.27	65.6	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Velocità di eritrosedimentazione 1h

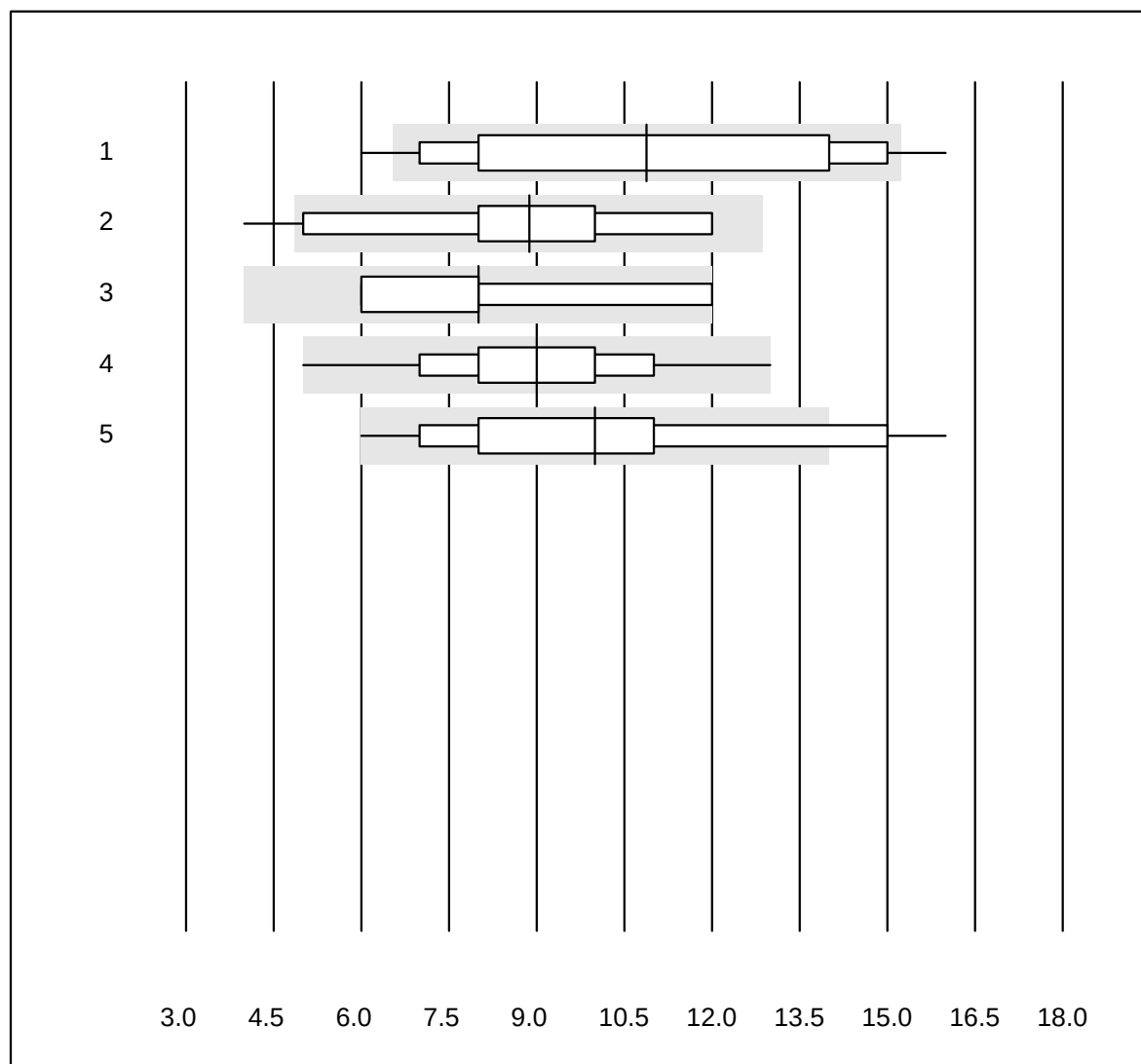


Tolleranza MQ : 40 %
(< 10: +/- 4 mm/h)

Velocità di eritrosedimentazione 1h (mm/h)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 MINI-CUBE	27	81.5	11.1	7.4	11	29.8	e*
2 Sarstedt Sedivette	24	87.5	8.3	4.2	9	25.3	e*
3 Sarstedt Microvette	4	75.0	25.0	0.0	8	29.6	e*
4 BD Seditainer	43	93.0	4.7	2.3	9	17.9	e
5 altri metodi	20	75.0	25.0	0.0	10	26.6	e*


Velocità di eritrosedimentazione 2h

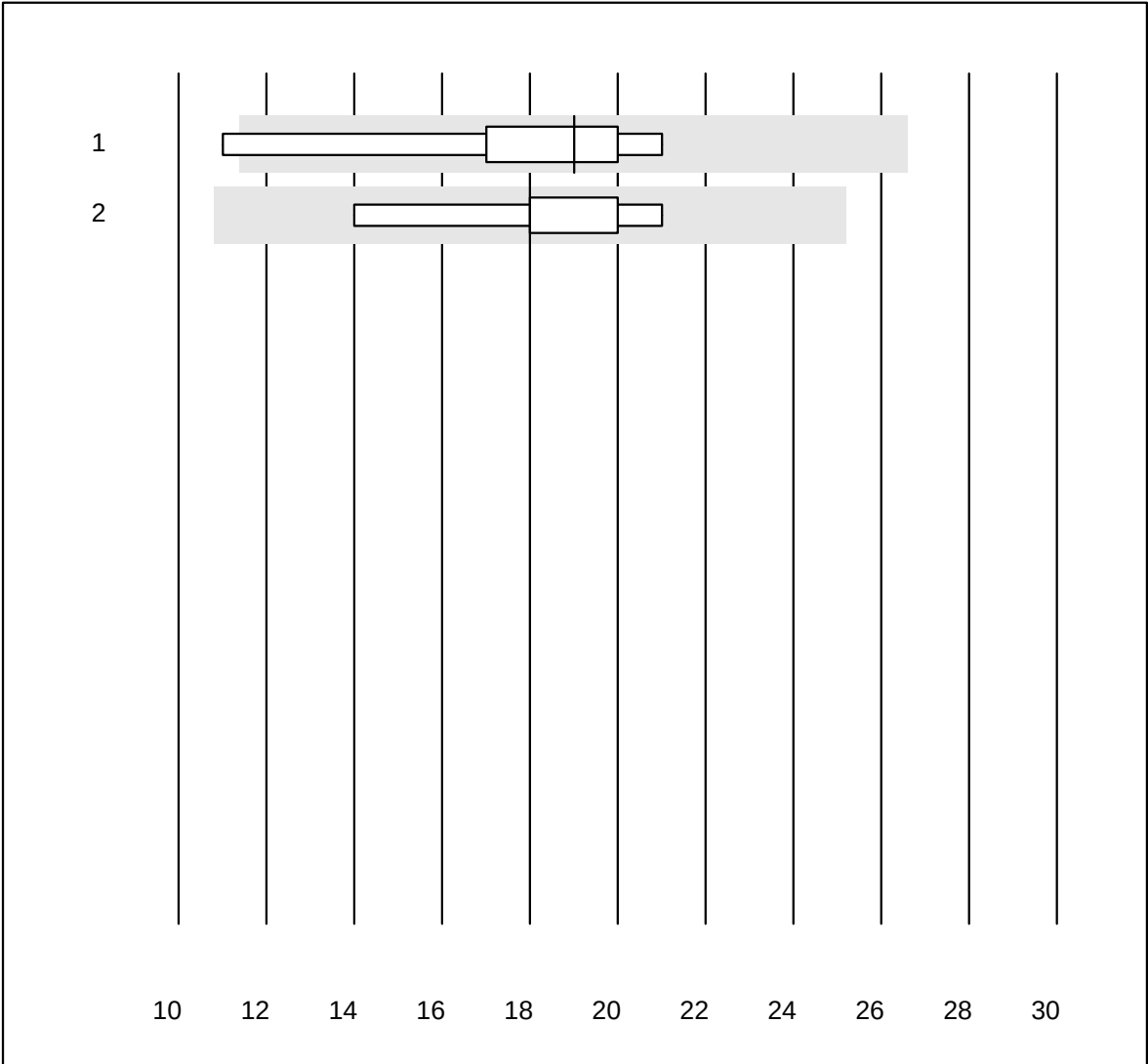

Tolleranza MQ : 40 % Velocità di eritrosedimentazione 2h (mm/2h)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sarstedt Sedivette	8	87.5	12.5	0.0	19	17.6	e*
2	BD Seditainer	5	100.0	0.0	0.0	18	14.7	e*
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Emoglobina HS

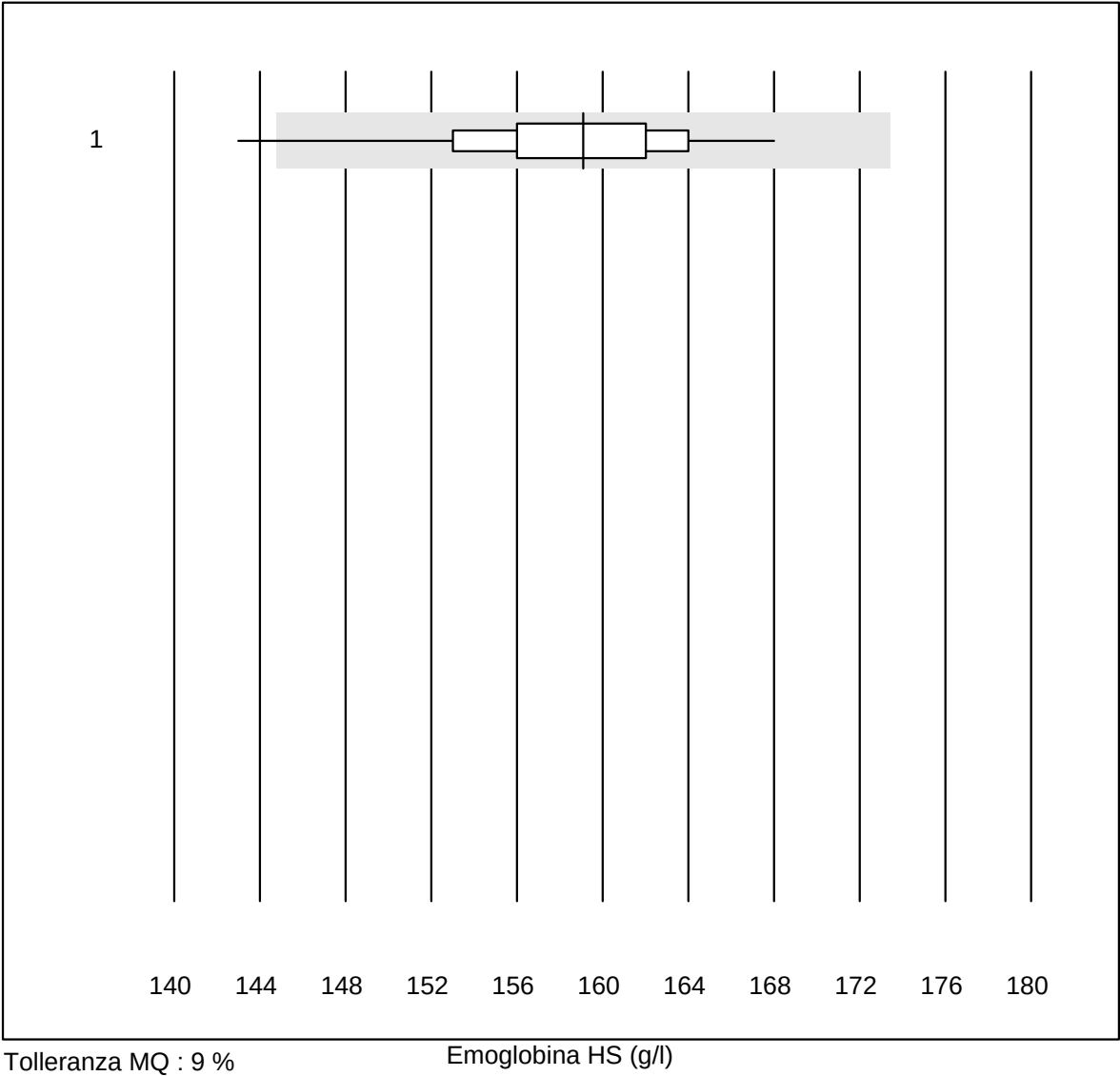

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	PixCell HemoScreen	31	74.2	3.2	22.6	159.08	3.3	e

Ematocrito HS

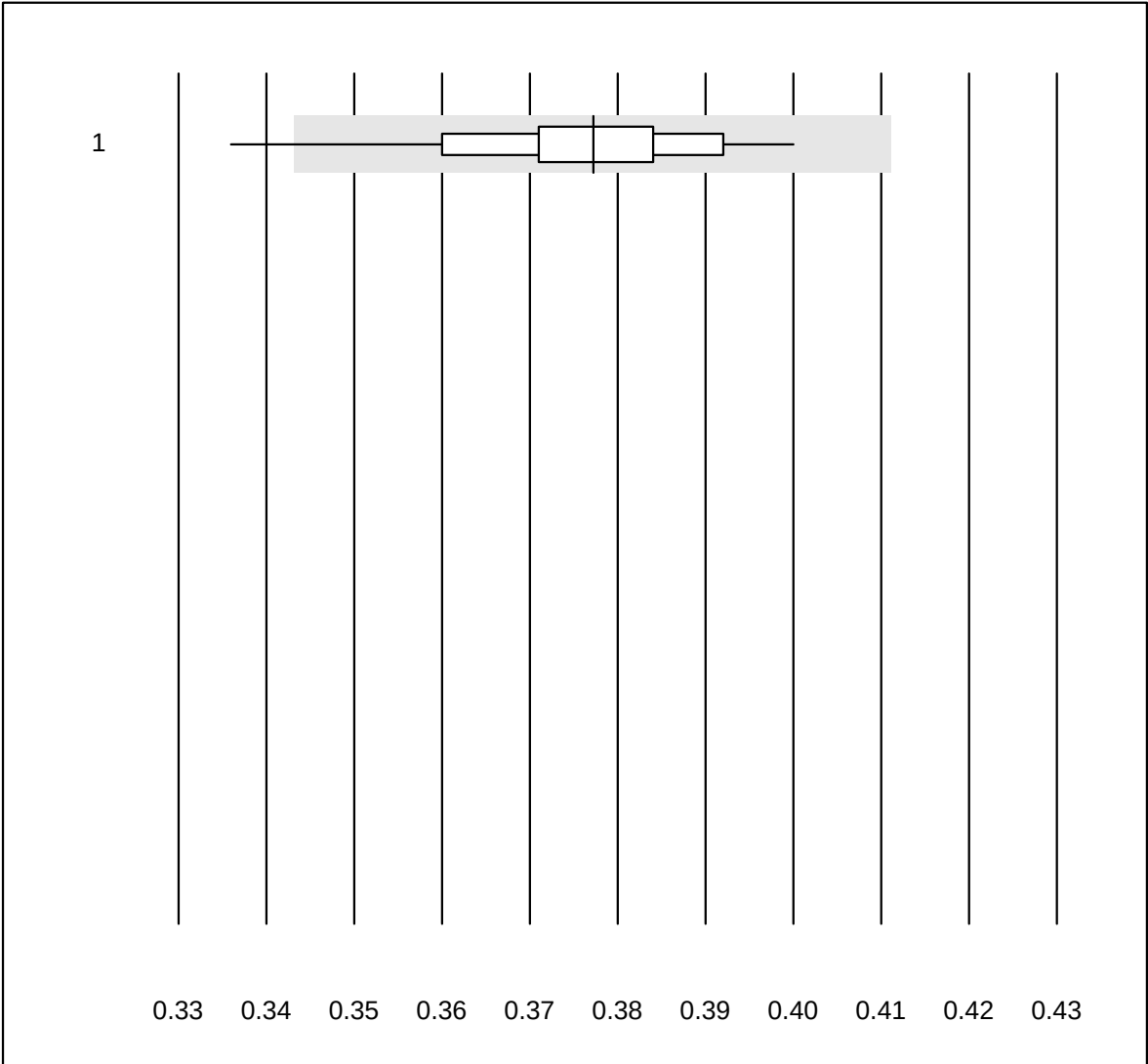


Tolleranza MQ : 9 %

Ematocrito HS (l/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	PixCell HemoScreen	31	77.4	3.2	19.4	0.38	3.7	e

Eritrociti HS

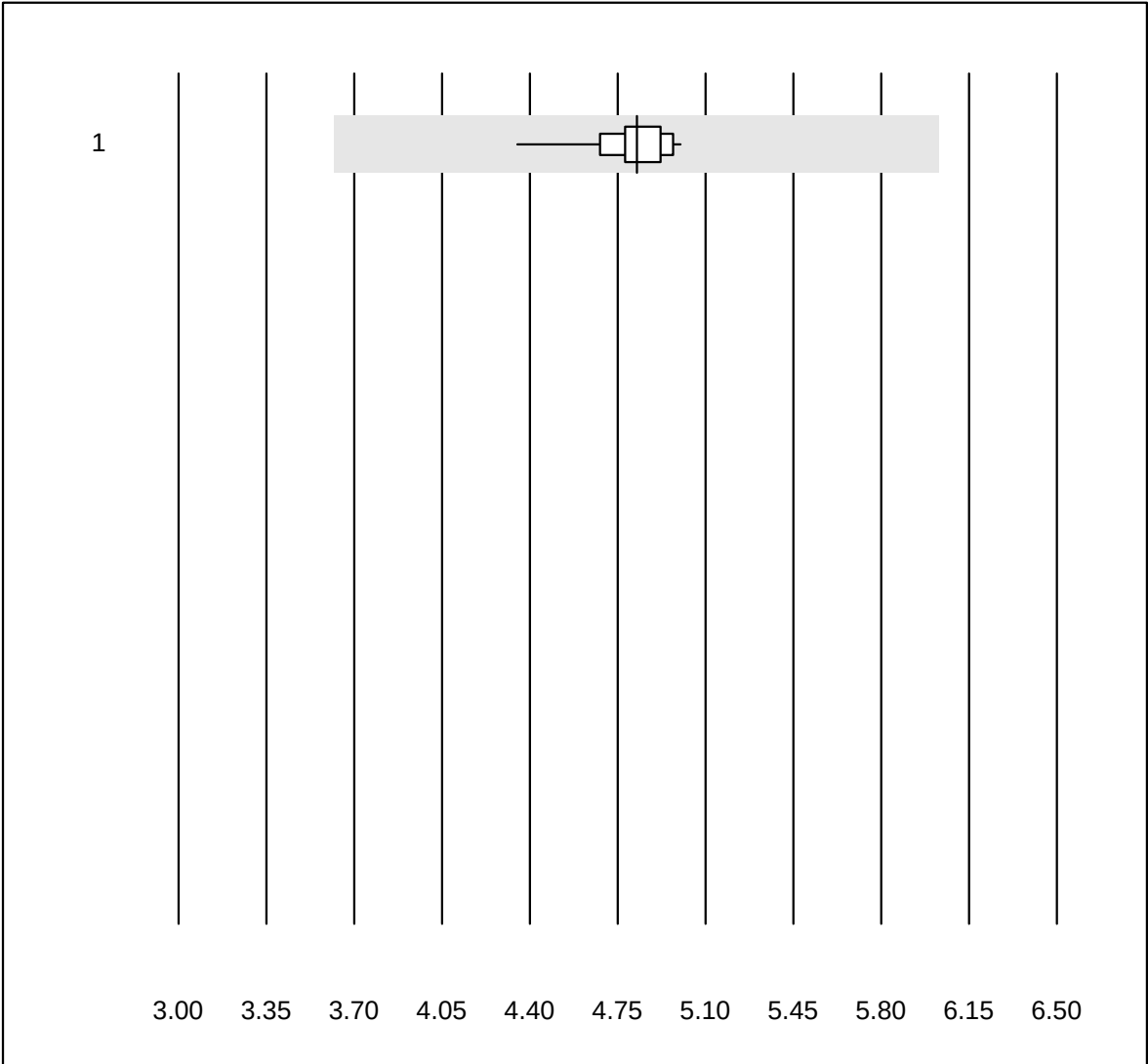


Tolleranza MQ : 25 %

Eritrociti HS (T/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	PixCell HemoScreen	31	83.9	0.0	16.1	4.83	2.7	e

Leucociti HS

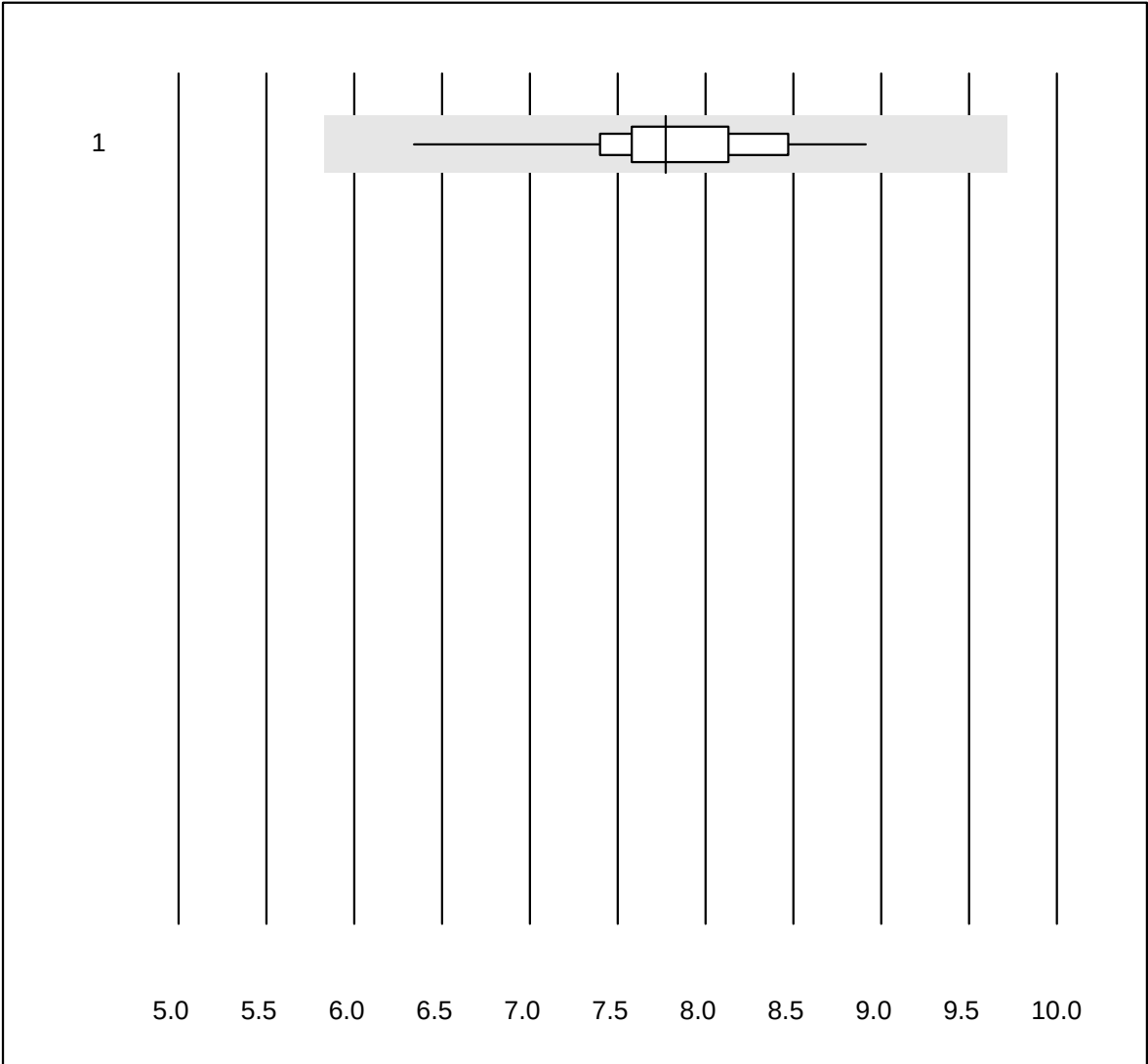


Tolleranza MQ : 25 %

Leucociti HS (G/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	PixCell HemoScreen	31	100.0	0.0	0.0	7.77	7.1	e


Trombociti HS

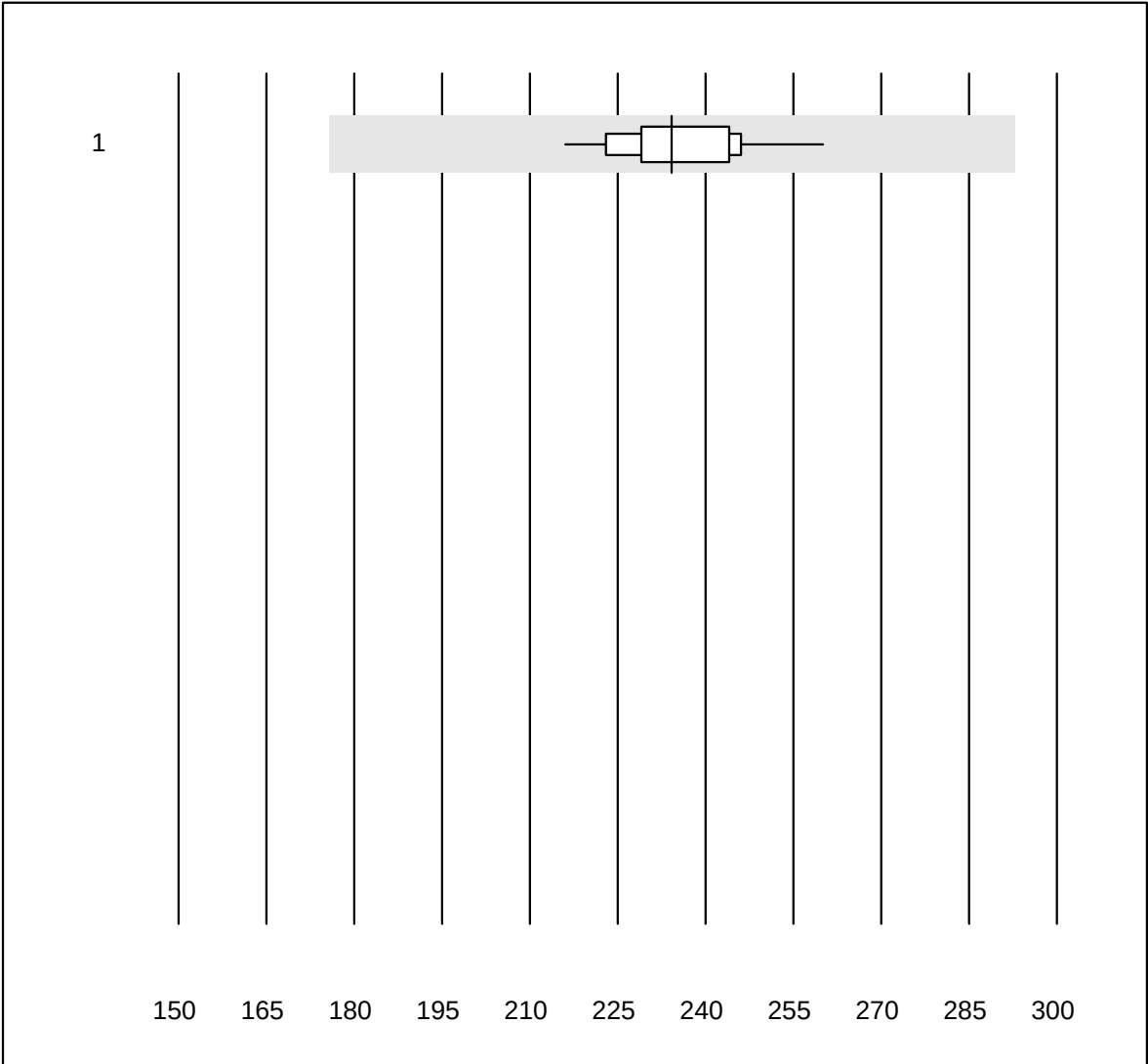

Tolleranza MQ : 25 % Trombociti HS (G/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	PixCell HemoScreen	31	100.0	0.0	0.0	234.2	4.2	e

Leucociti BF

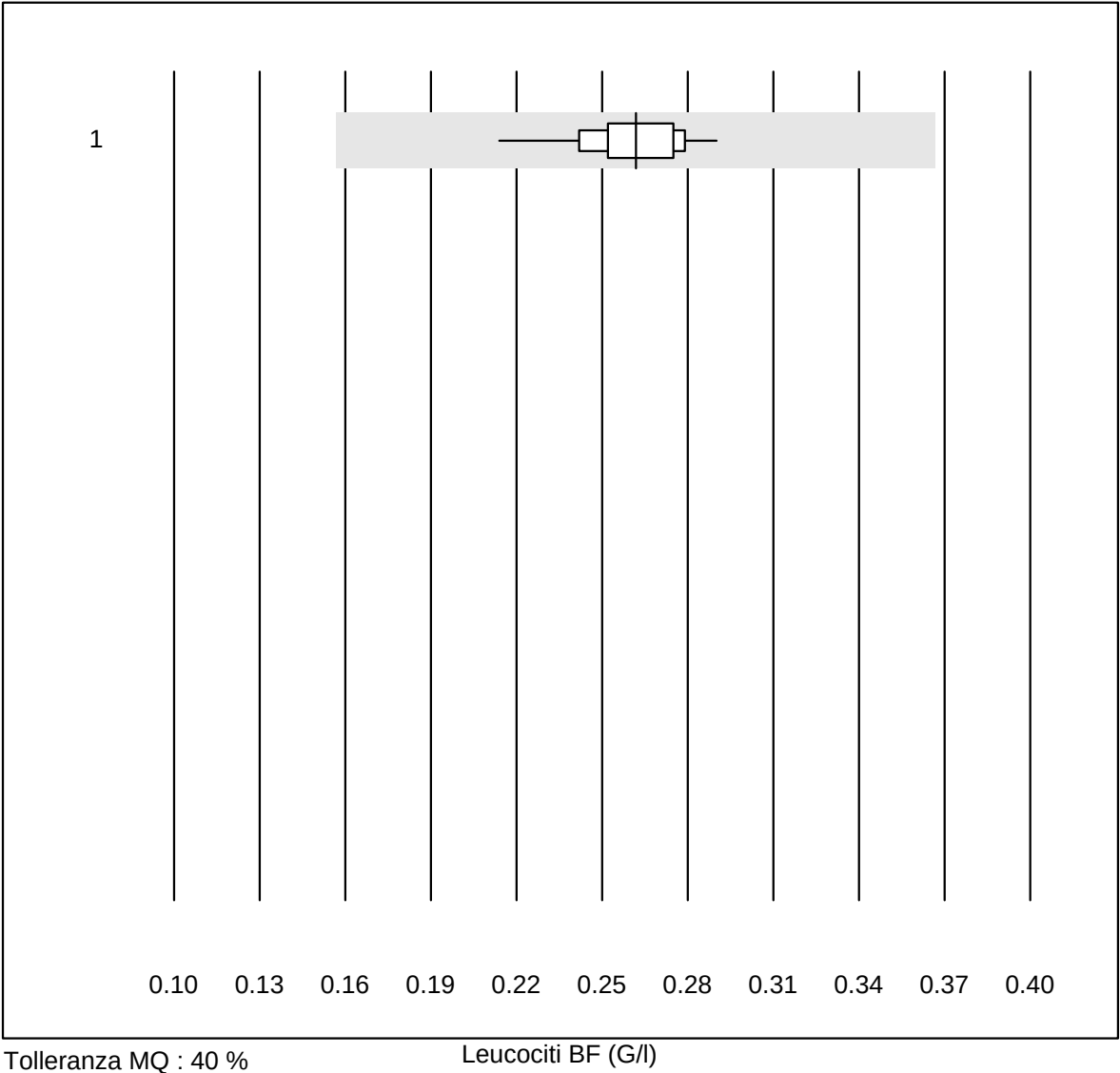


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	26	100.0	0.0	0.0	0.262	6.4	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Eritrociti BF




No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	25	100.0	0.0	0.0	77.519	5.3	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Totale di cellule (TC)

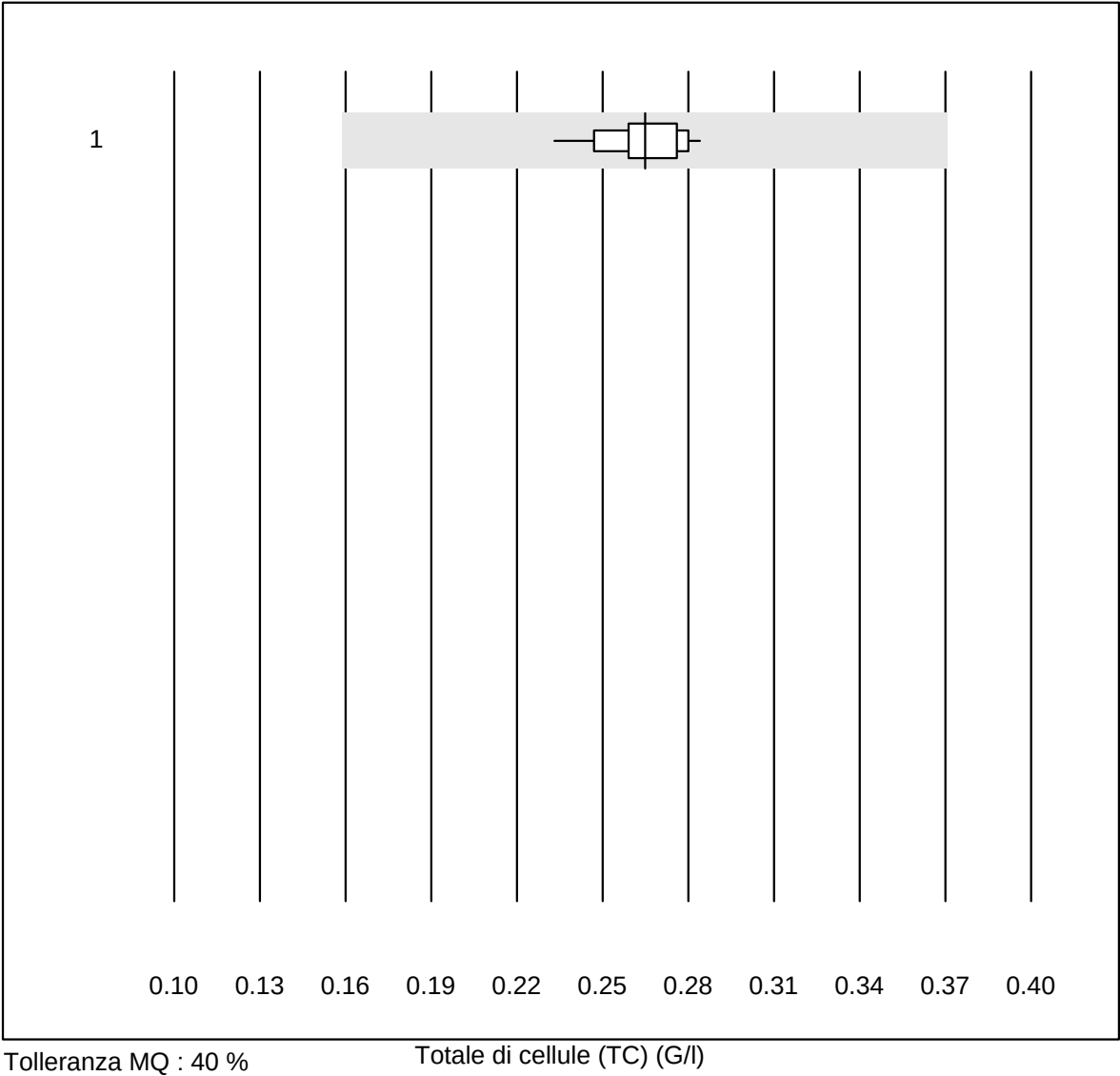

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	23	100.0	0.0	0.0	0.265	4.8	e

Cellule mononucleari (MN)

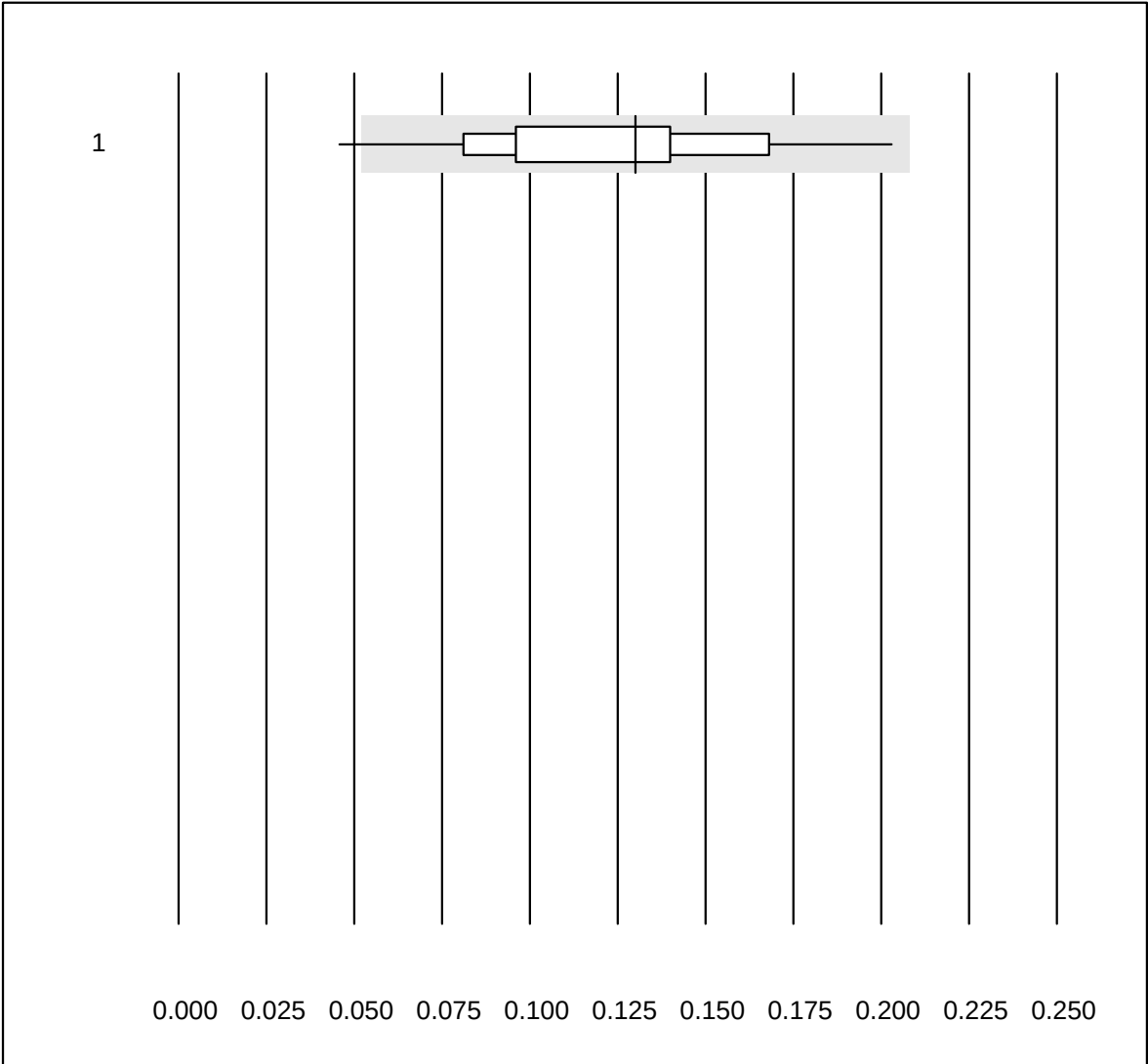


Tolleranza MQ : 60 %

Cellule mononucleari (MN) (G/l)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Sysmex	25	96.0	4.0	0.0	0.130	30.0	a

Cellule polinucleari (PMN)

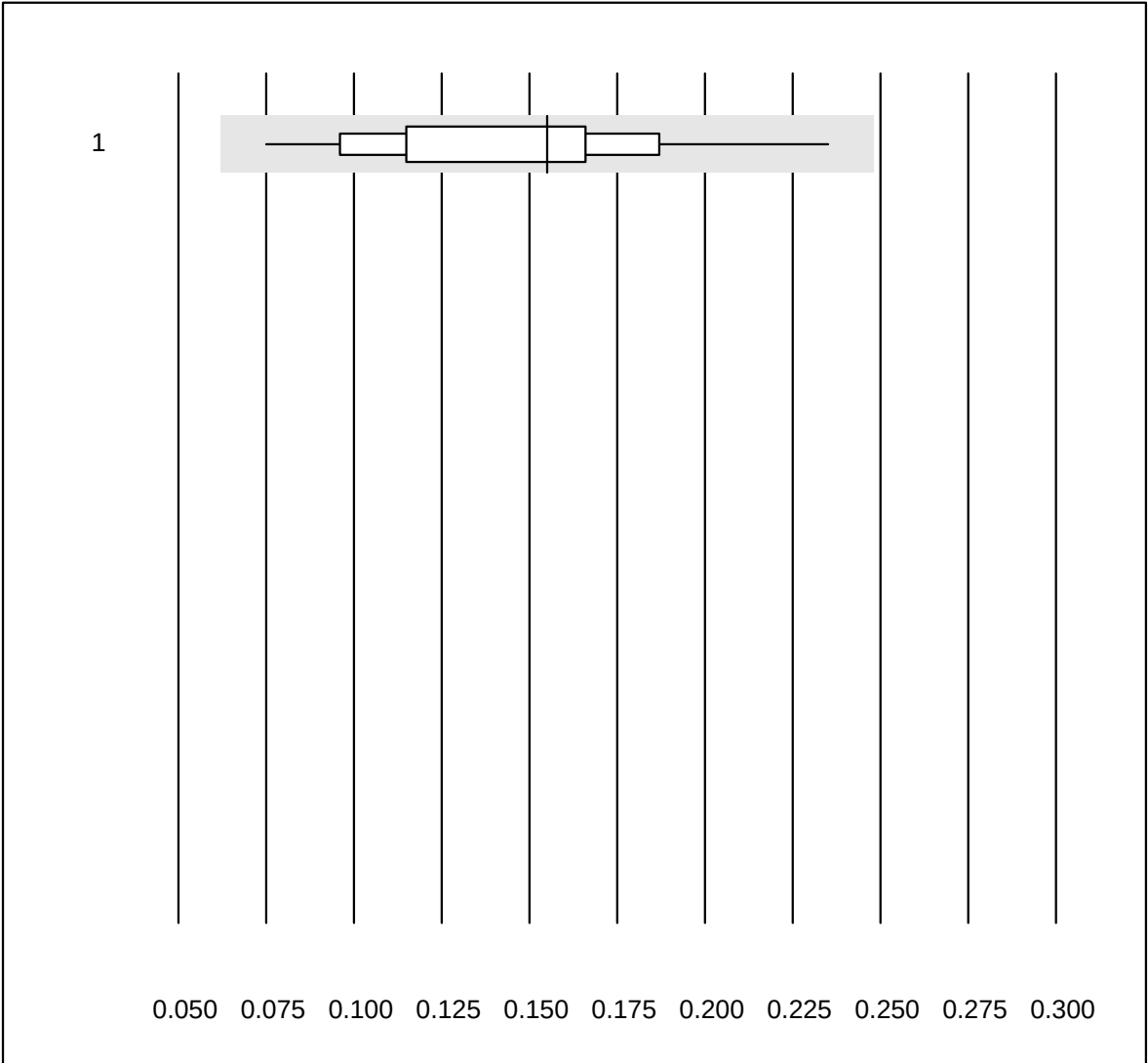


Tolleranza MQ : 60 %

Cellule polinucleari (PMN) (G/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Sysmex	25	100.0	0.0	0.0	0.155	27.6	a

Velocità di eritrosedimentazione

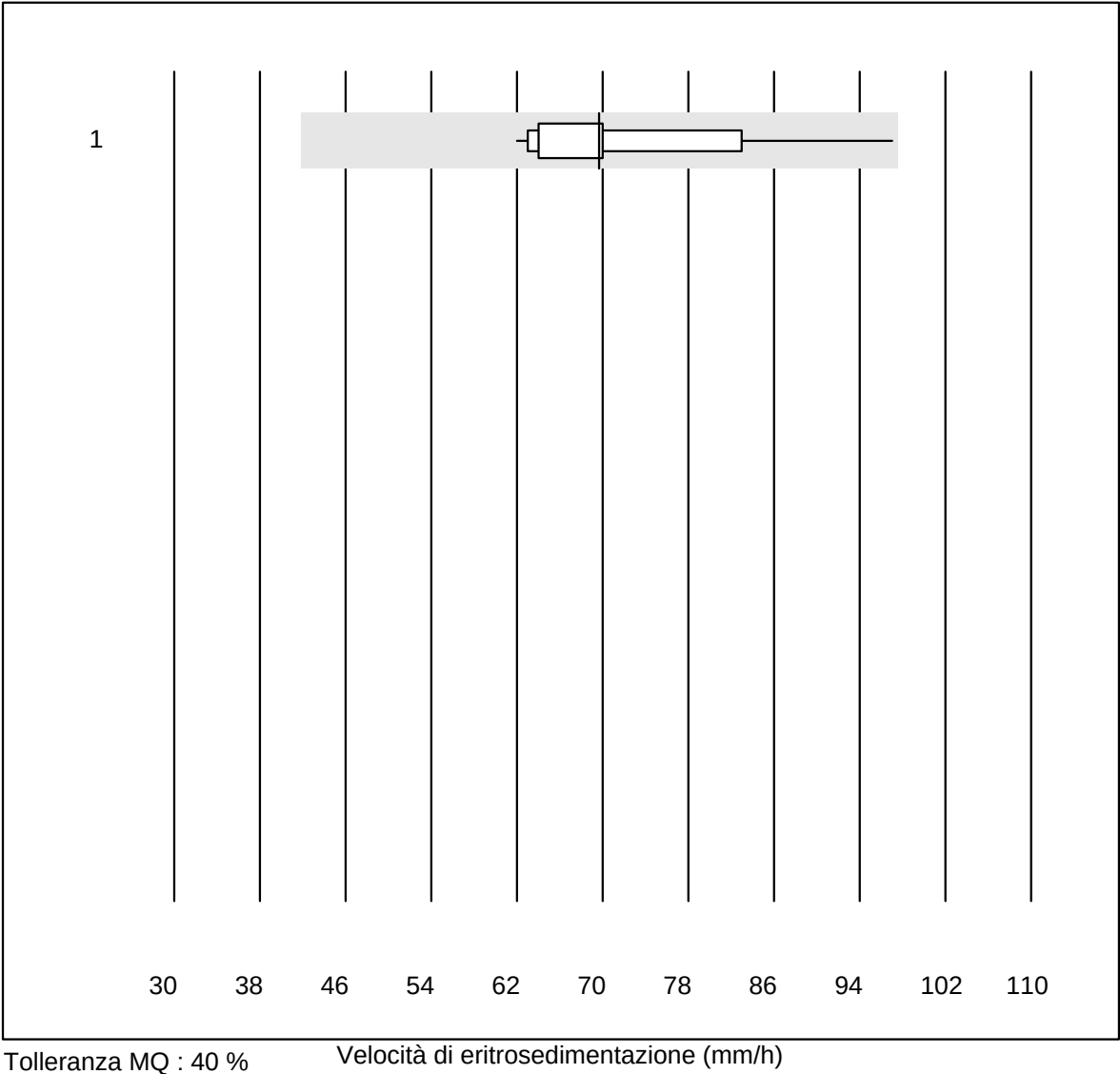

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 miniSed	20	80.0	0.0	20.0	70	13.3	e


CRP

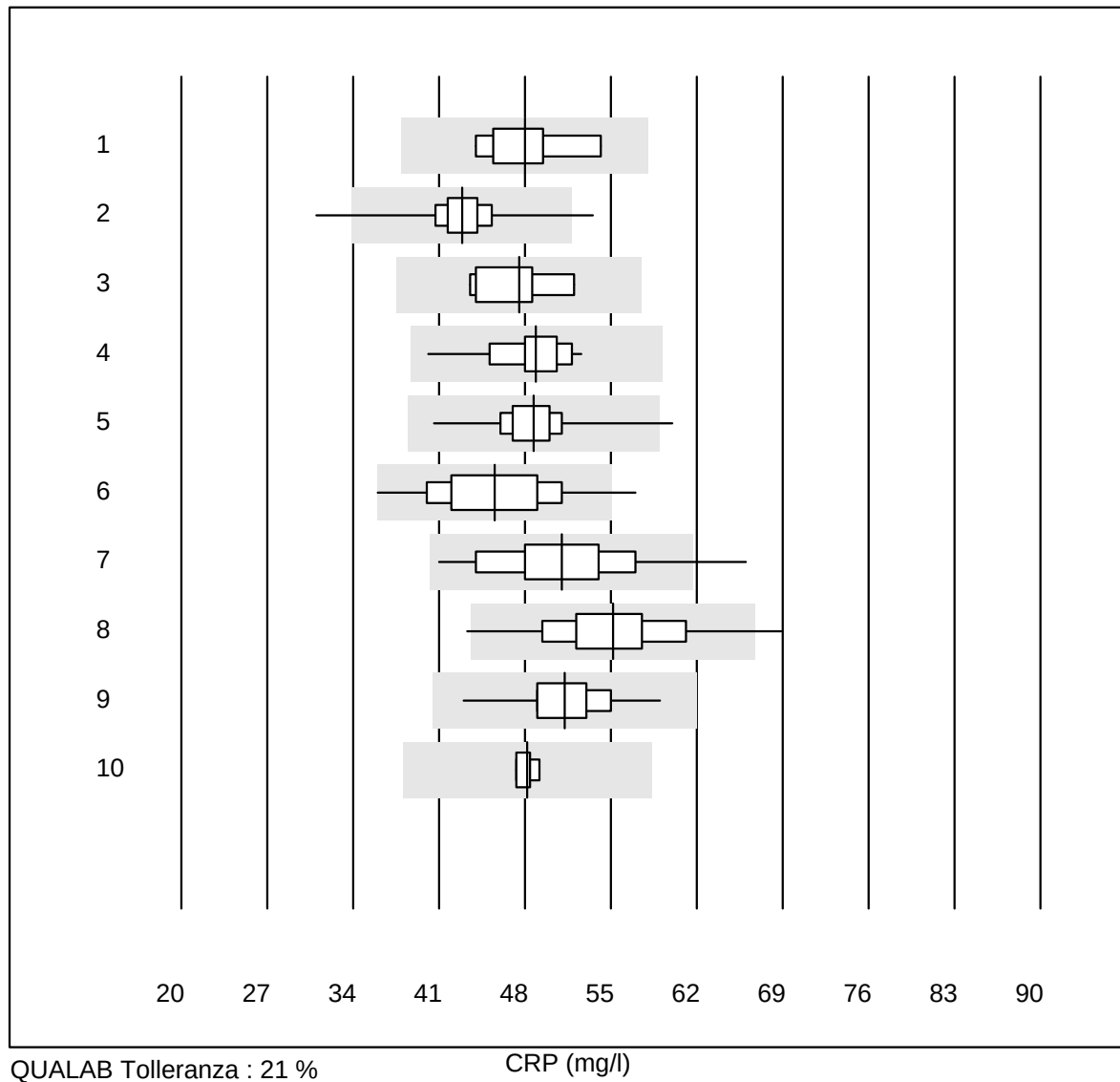

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Autolyser	11	81.8	0.0	18.2	48.0	6.9	e
2 Cobas b101	459	98.5	0.4	1.1	42.9	4.5	e
3 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	47.5	5.9	e
4 Cobas	42	100.0	0.0	0.0	48.9	5.6	e
5 Afinion	1004	99.4	0.1	0.5	48.7	4.2	e
6 NycoCard SingleTest-	38	84.2	5.3	10.5	45.6	11.2	e
7 Quick Read go	85	90.5	2.4	7.1	51.0	9.6	e
8 Eurolyser	52	80.8	3.8	15.4	55.1	8.6	e
9 Fuji Dri-Chem	13	92.3	0.0	7.7	51.3	7.5	e
10 Nefelometria	4	100.0	0.0	0.0	48.2	1.6	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


CRP

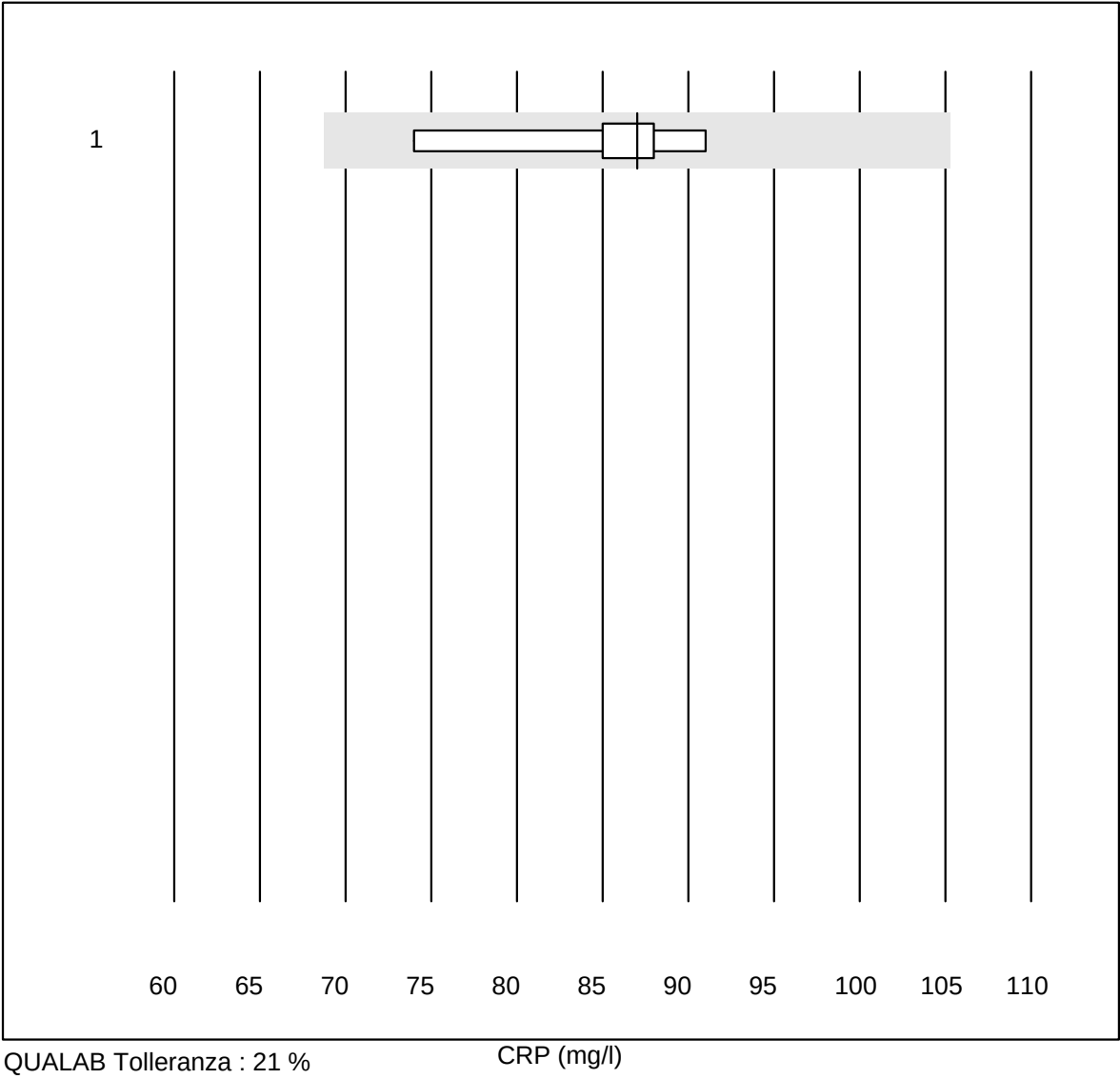

QUALAB Tolleranza : 21 %


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 QuickRead (sangue in	9	100.0	0.0	0.0	87.0	5.8	e

CRP

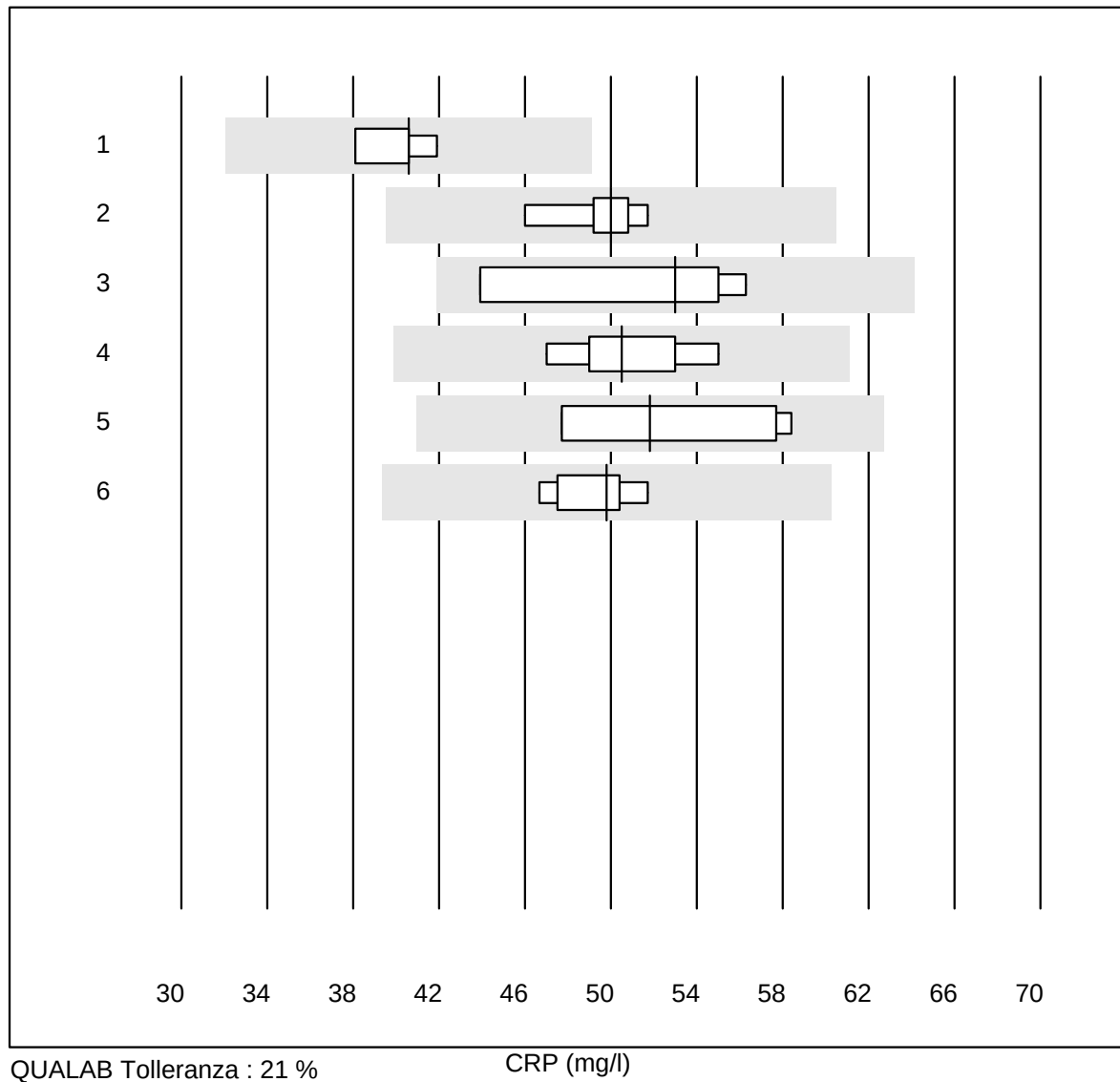

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Spinit	5	80.0	0.0	20.0	40.6	3.9	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	50.0	3.9	e
3 Beckman	5	80.0	0.0	20.0	53.0	10.8	e*
4 AQT 90 FLEX	6	100.0	0.0	0.0	50.5	5.6	e
5 Spotchem D-Concept	5	80.0	0.0	20.0	51.8	9.4	e*
6 altri metodi	6	83.3	0.0	16.7	49.8	4.2	e

IgG

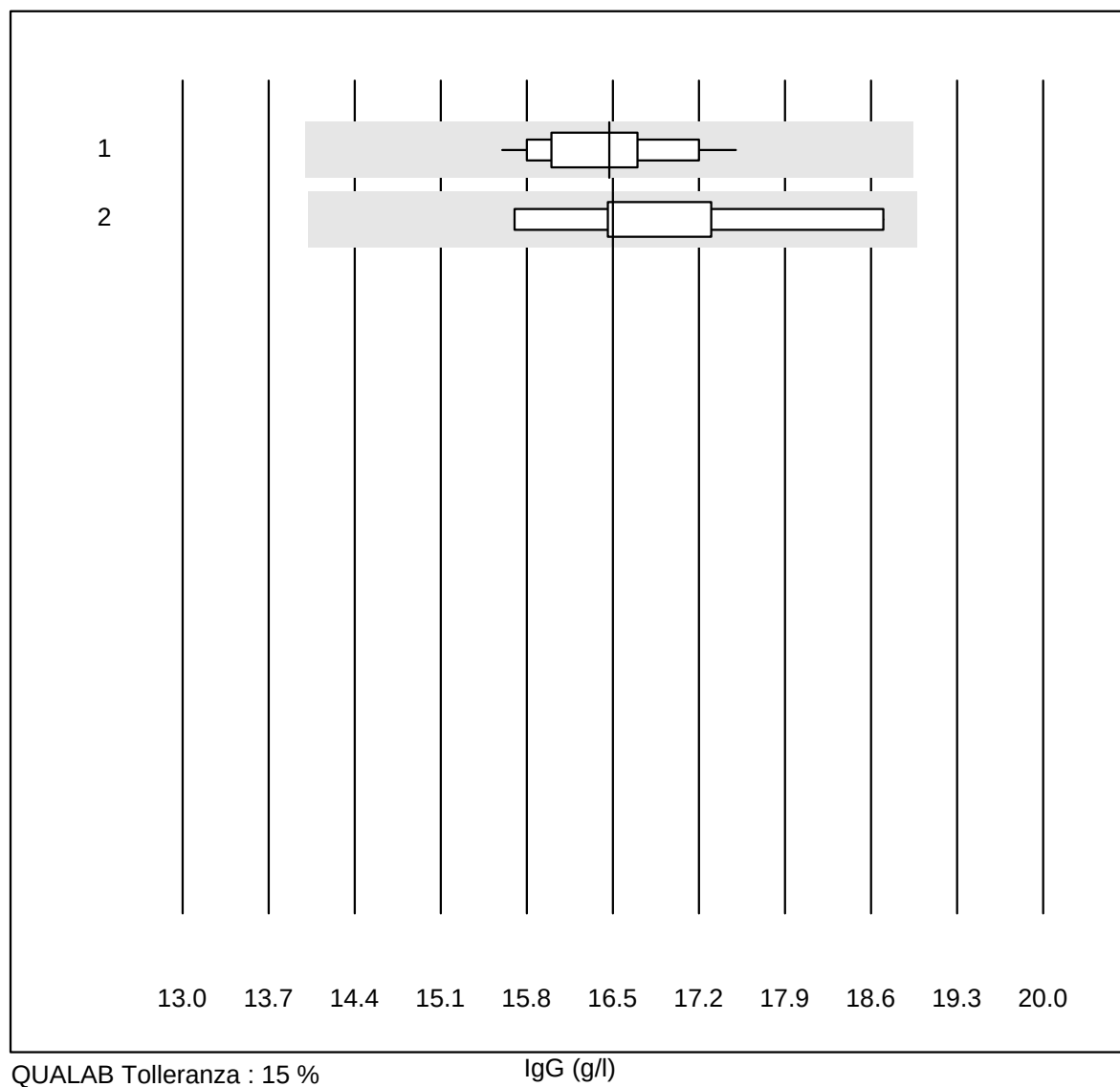


QUALAB Tolleranza : 15 %

IgG (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	16.47	3.3	e
2	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	16.50	5.8	e*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

IgA

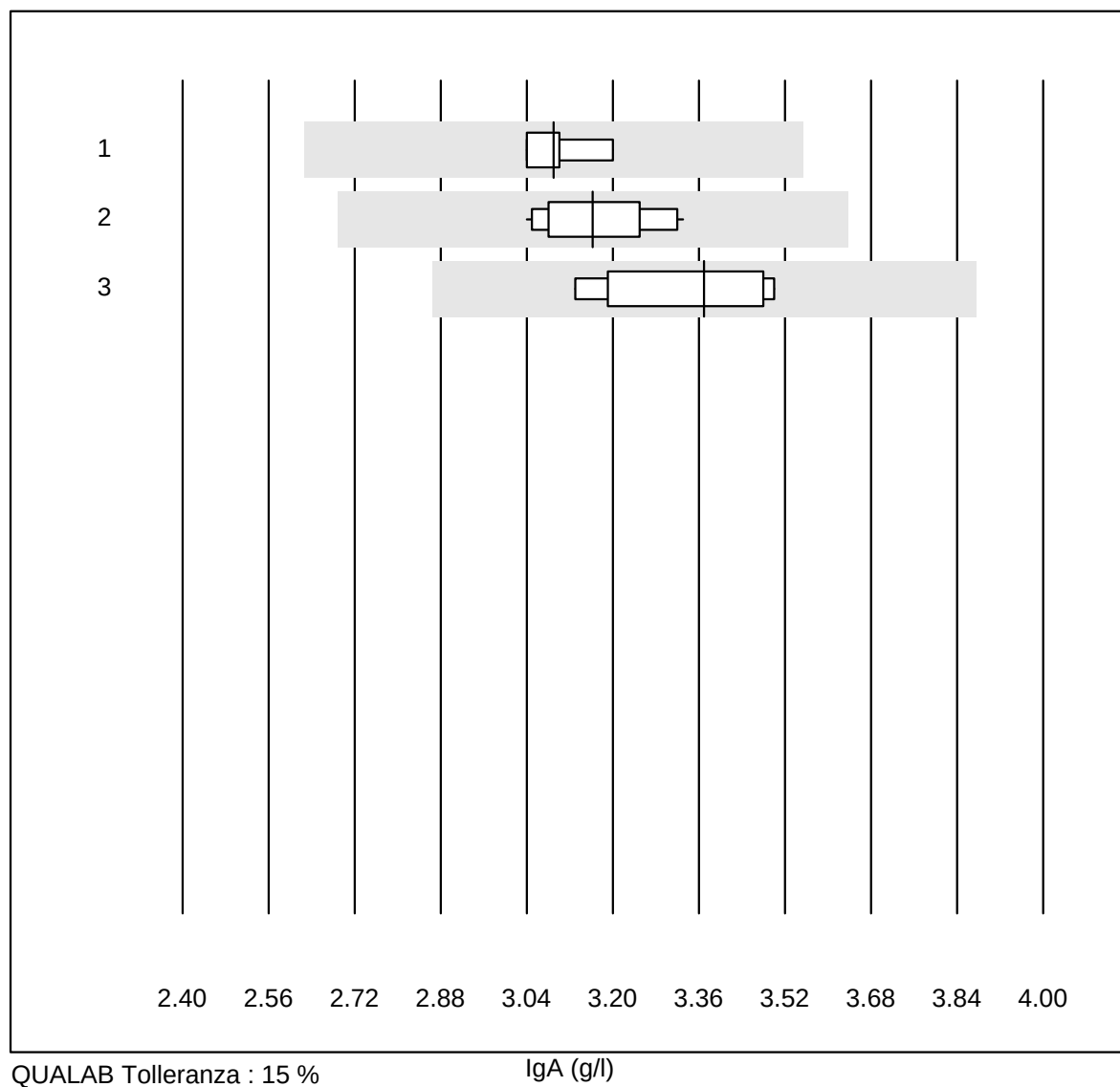


QUALAB Tolleranza : 15 %

IgA (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	3.09	2.1	e
2 Roche	14	100.0	0.0	0.0	3.16	3.1	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	3.37	4.8	e*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


IgM

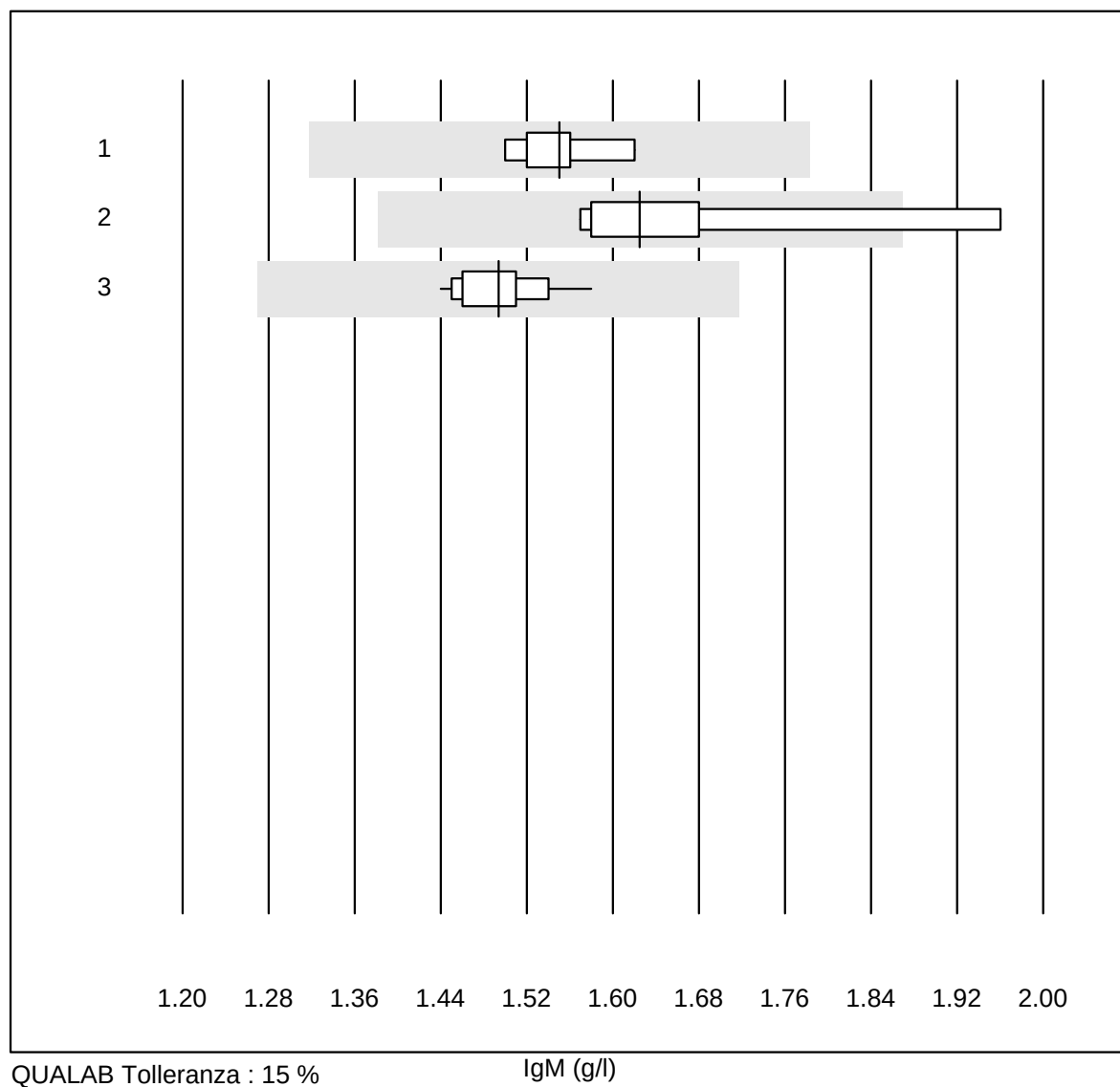

QUALAB Tolleranza : 15 %


IgM (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Turbidimetria	6	100.0	0.0	0.0	1.55	2.6	e
2	Siemens	8	87.5	12.5	0.0	1.63	7.6	e*
3	Roche	14	100.0	0.0	0.0	1.49	2.6	e

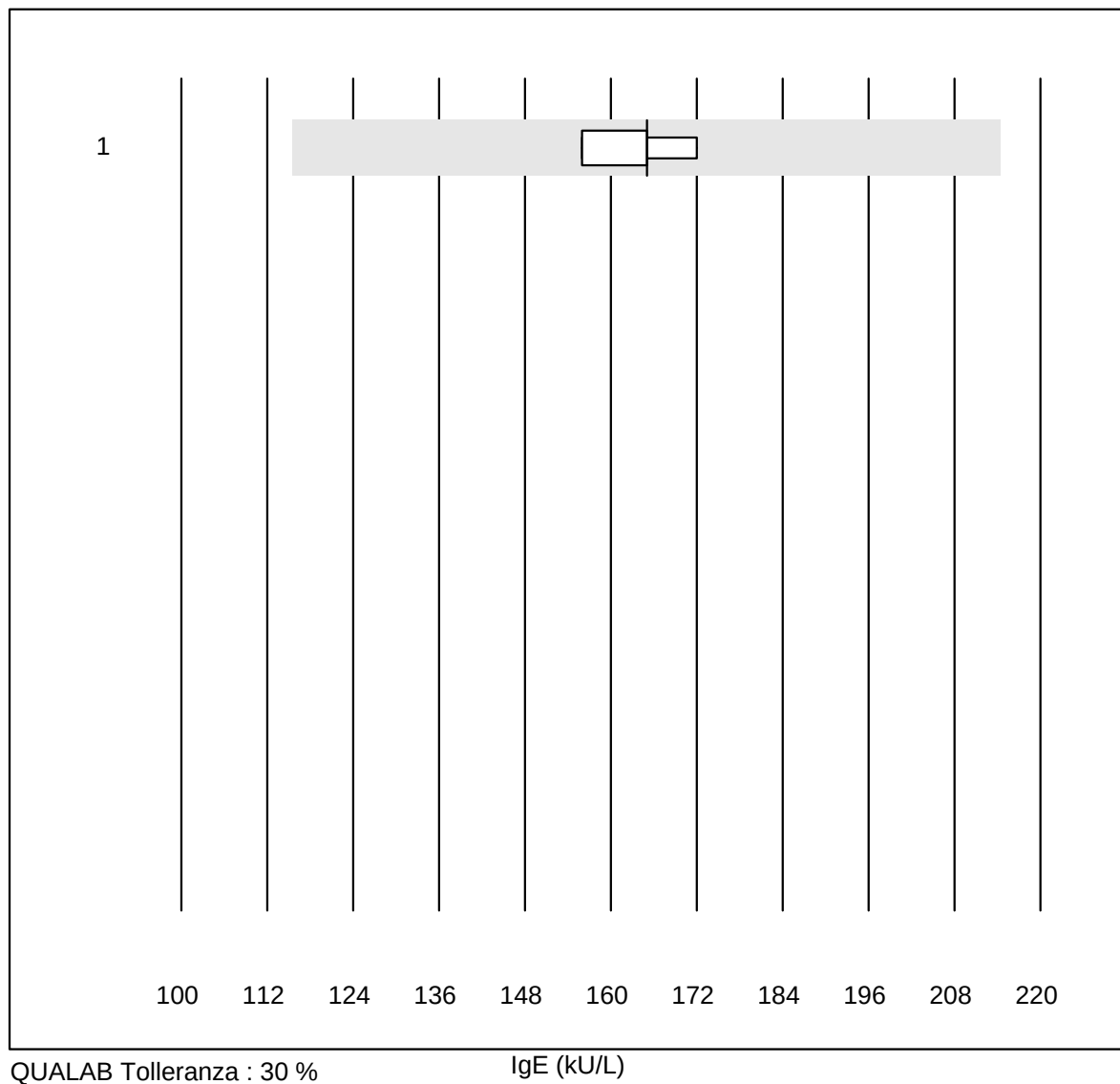IgE

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	4	100.0	0.0	0.0	165	4.0	e
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Alpha-1-Antitripsina

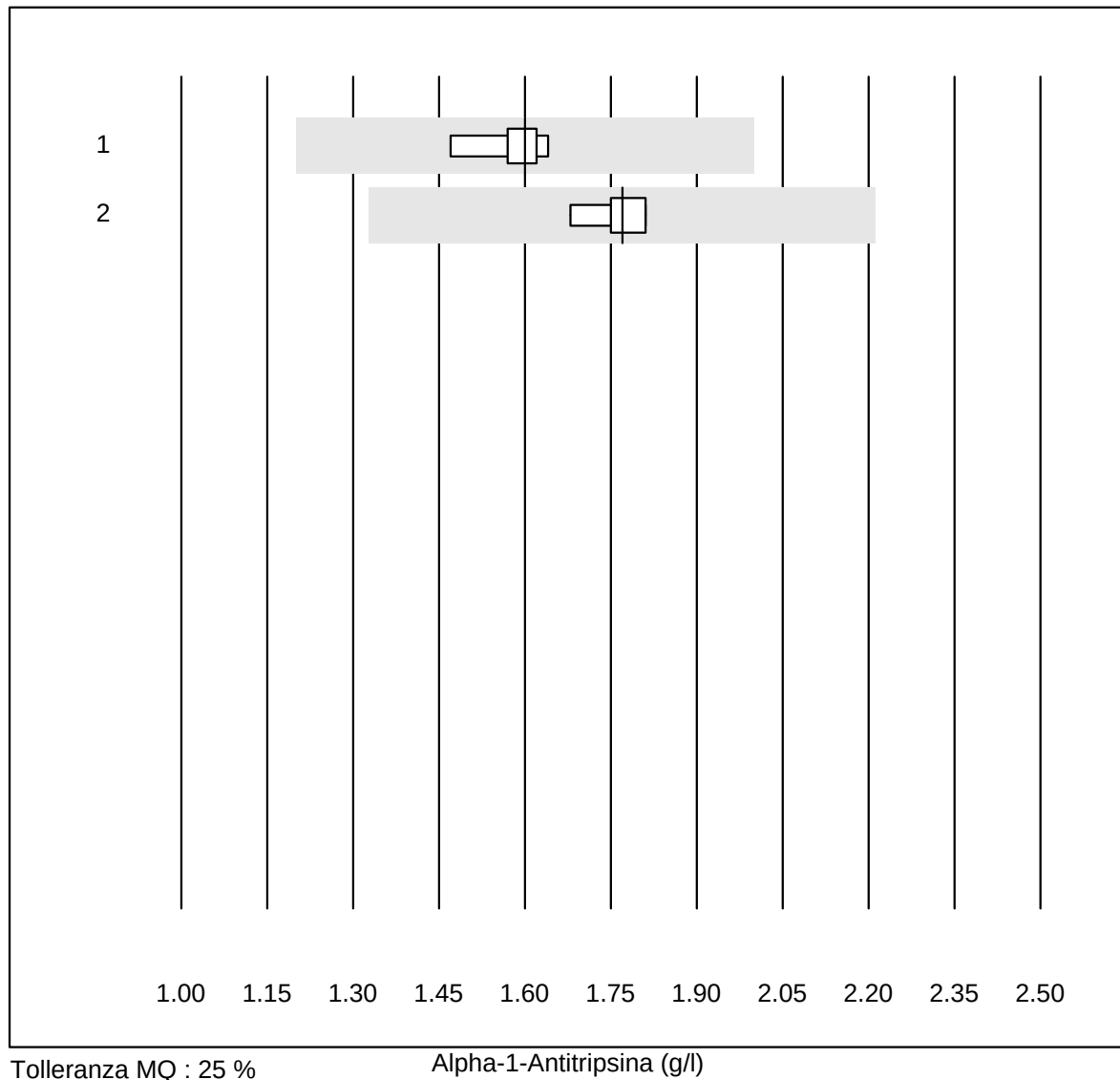


Tolleranza MQ : 25 %

Alpha-1-Antitripsina (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	1.60	4.2	e
2	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	1.77	3.0	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Anticorpi anti-streptolisina

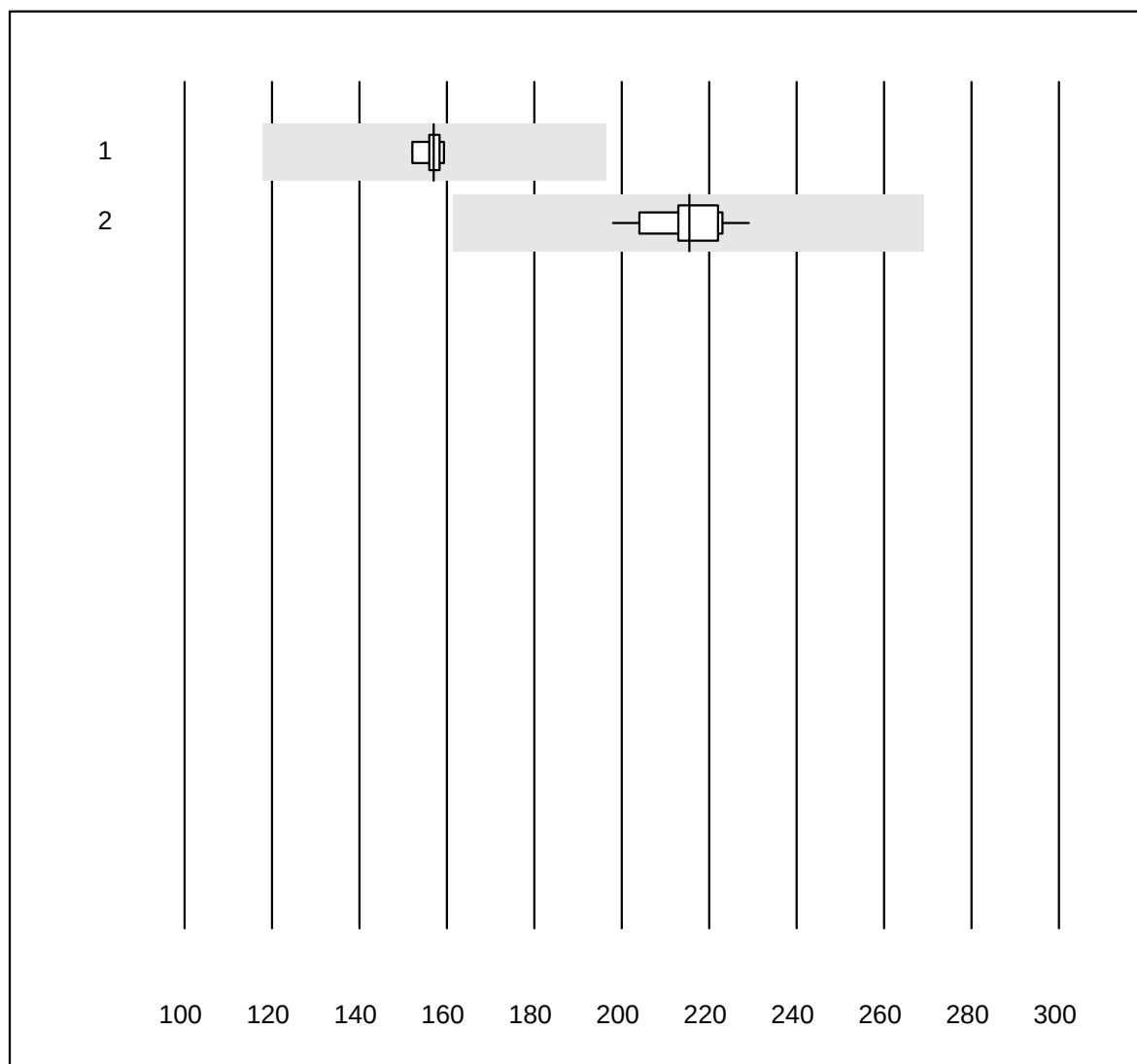


Tolleranza MQ : 25 %

Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	157	1.8	e
2 Roche	11	100.0	0.0	0.0	215	4.0	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Complemento C3

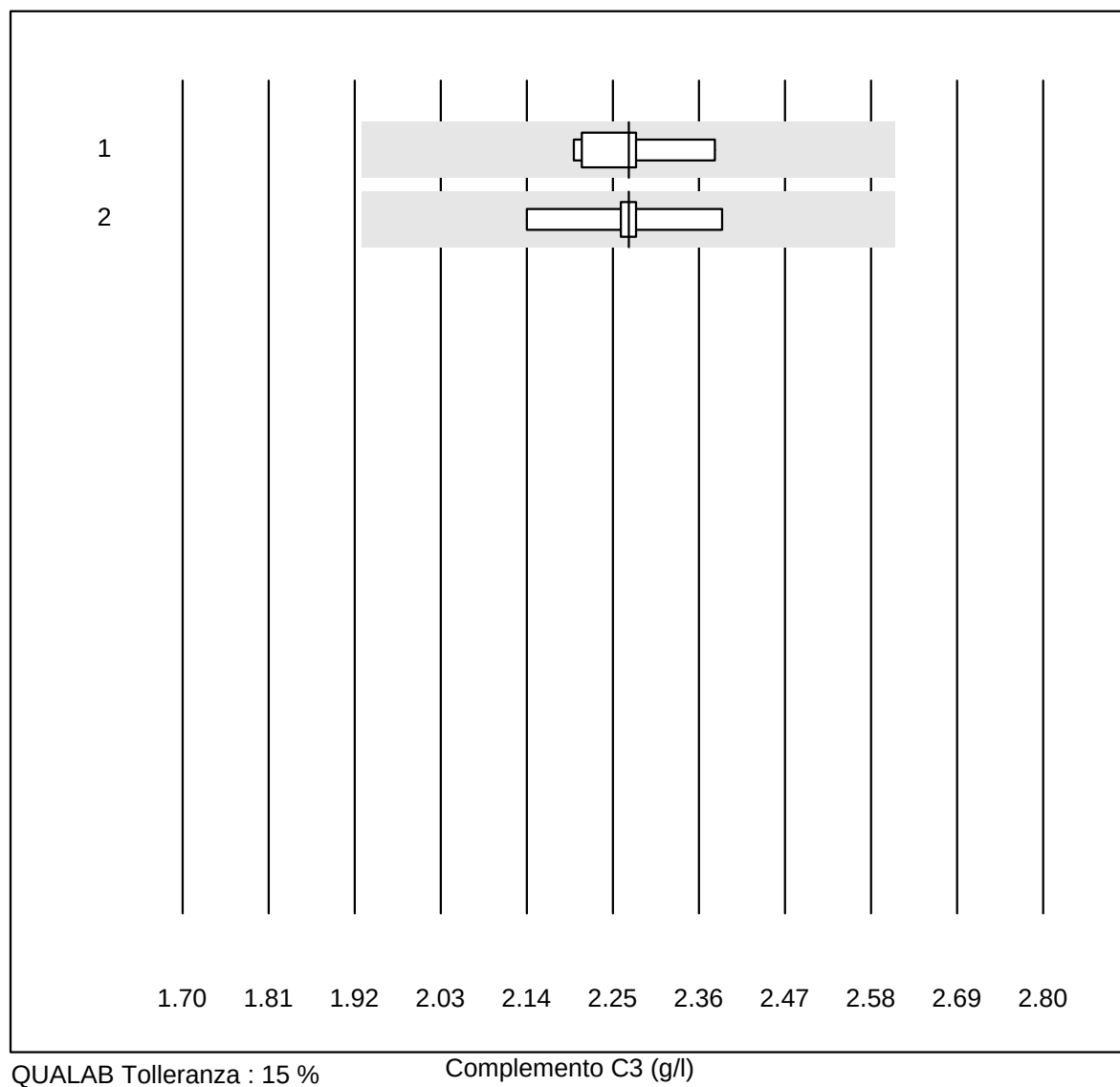


QUALAB Tolleranza : 15 %

Complemento C3 (g/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	2.27	2.7	e
2	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	2.27	3.9	e


8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Complemento C4

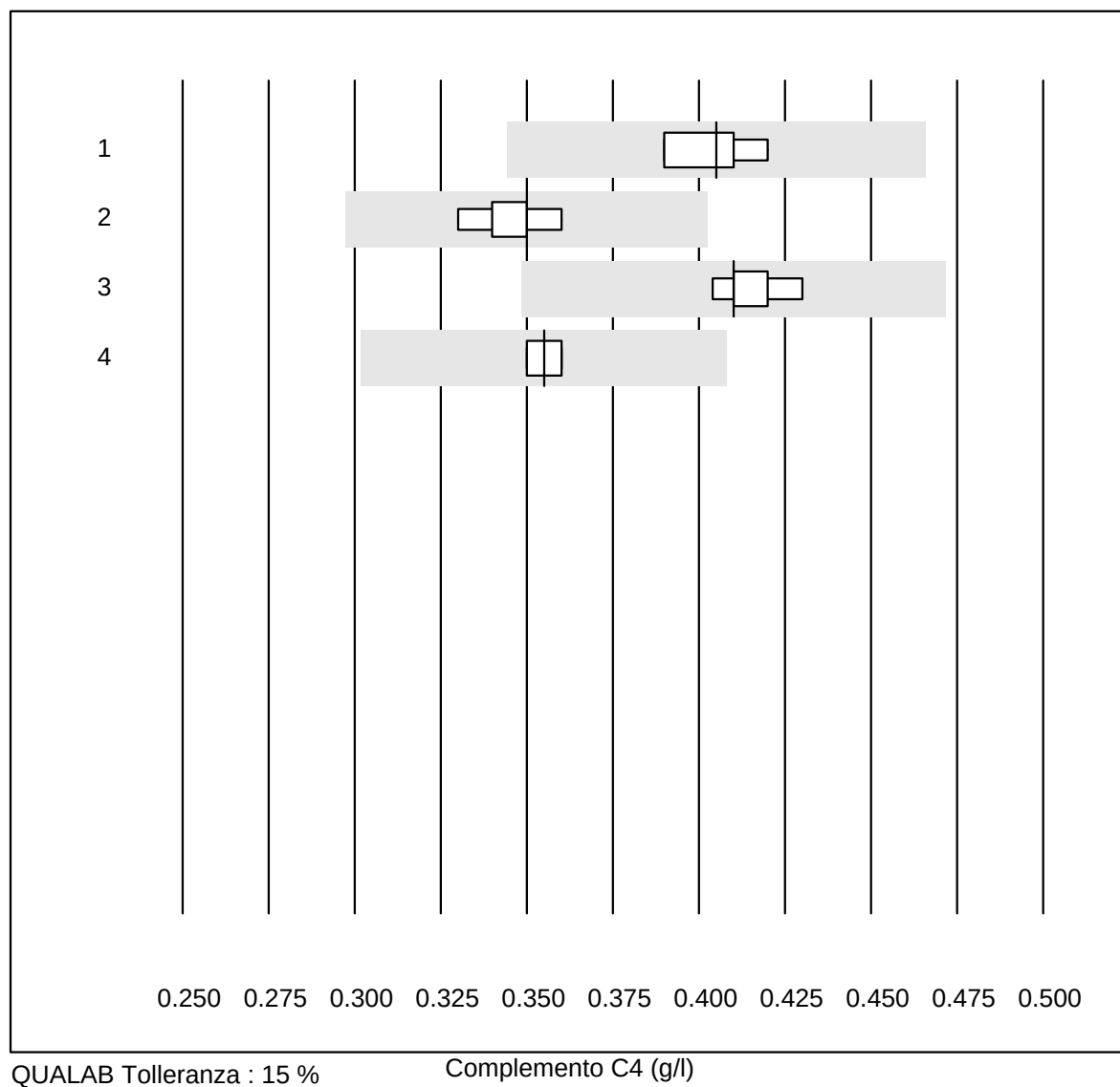

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Alinity	4	100.0	0.0	0.0	0.41	3.2	e
2	Roche	7	100.0	0.0	0.0	0.35	2.7	e
3	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	0.41	2.5	e
4	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	0.36	1.6	e


Aptoglobina

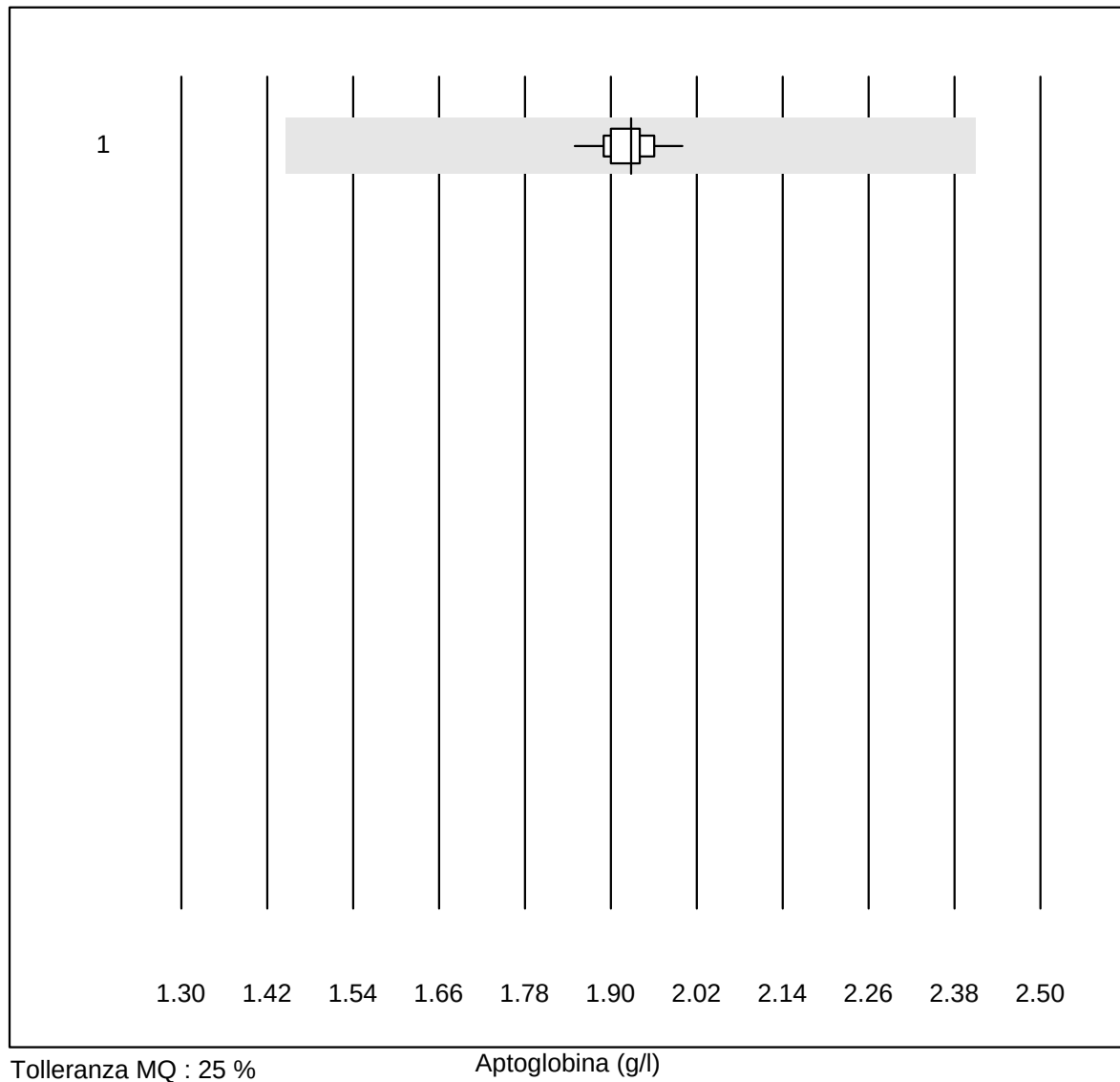


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	24	100.0	0.0	0.0	1.93	1.8	e

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Transferrina

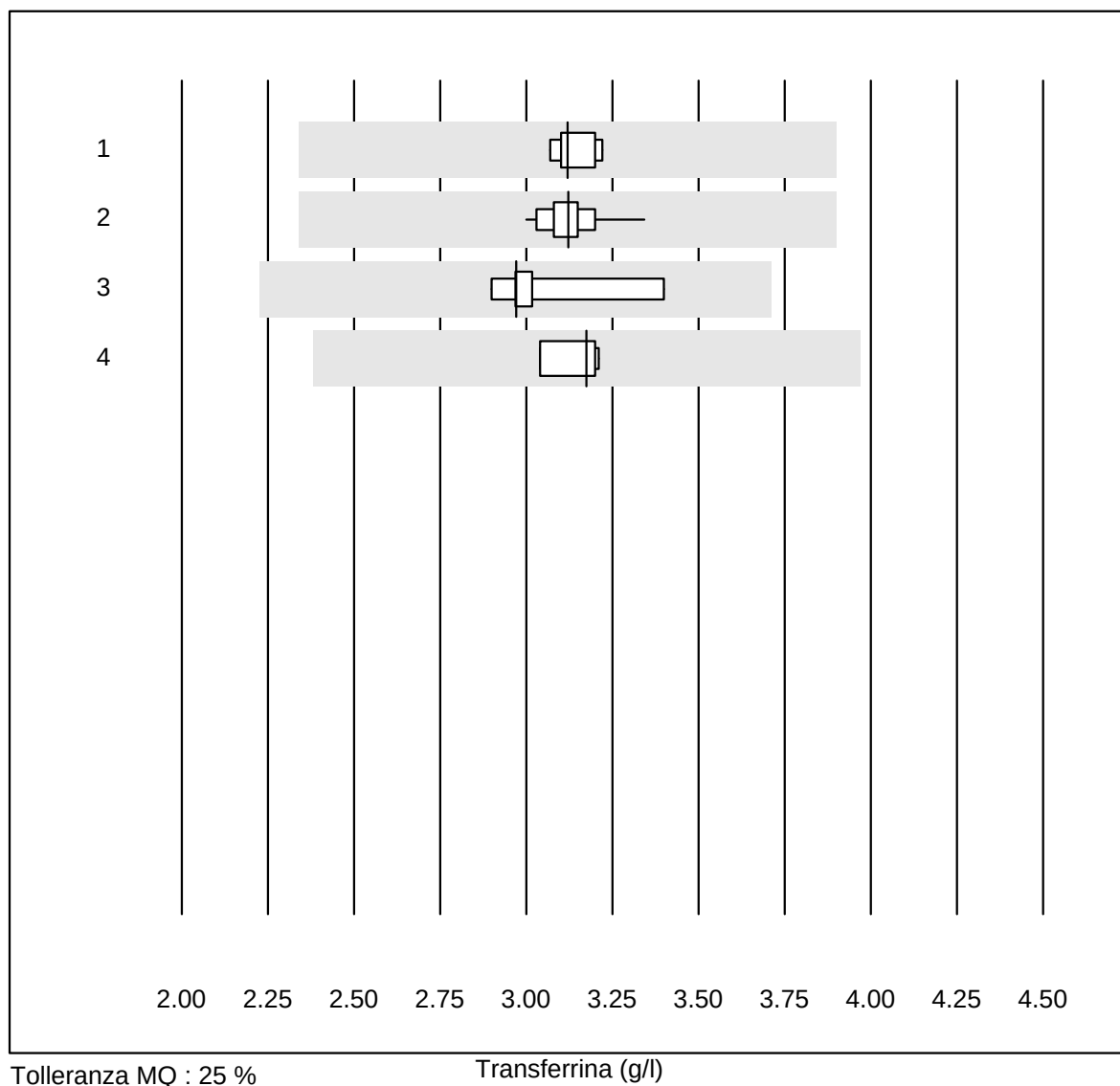


No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	3.12	2.1	e
2	Roche	24	100.0	0.0	0.0	3.12	2.5	e
3	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	2.97	6.5	e
4	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	3.18	2.5	e

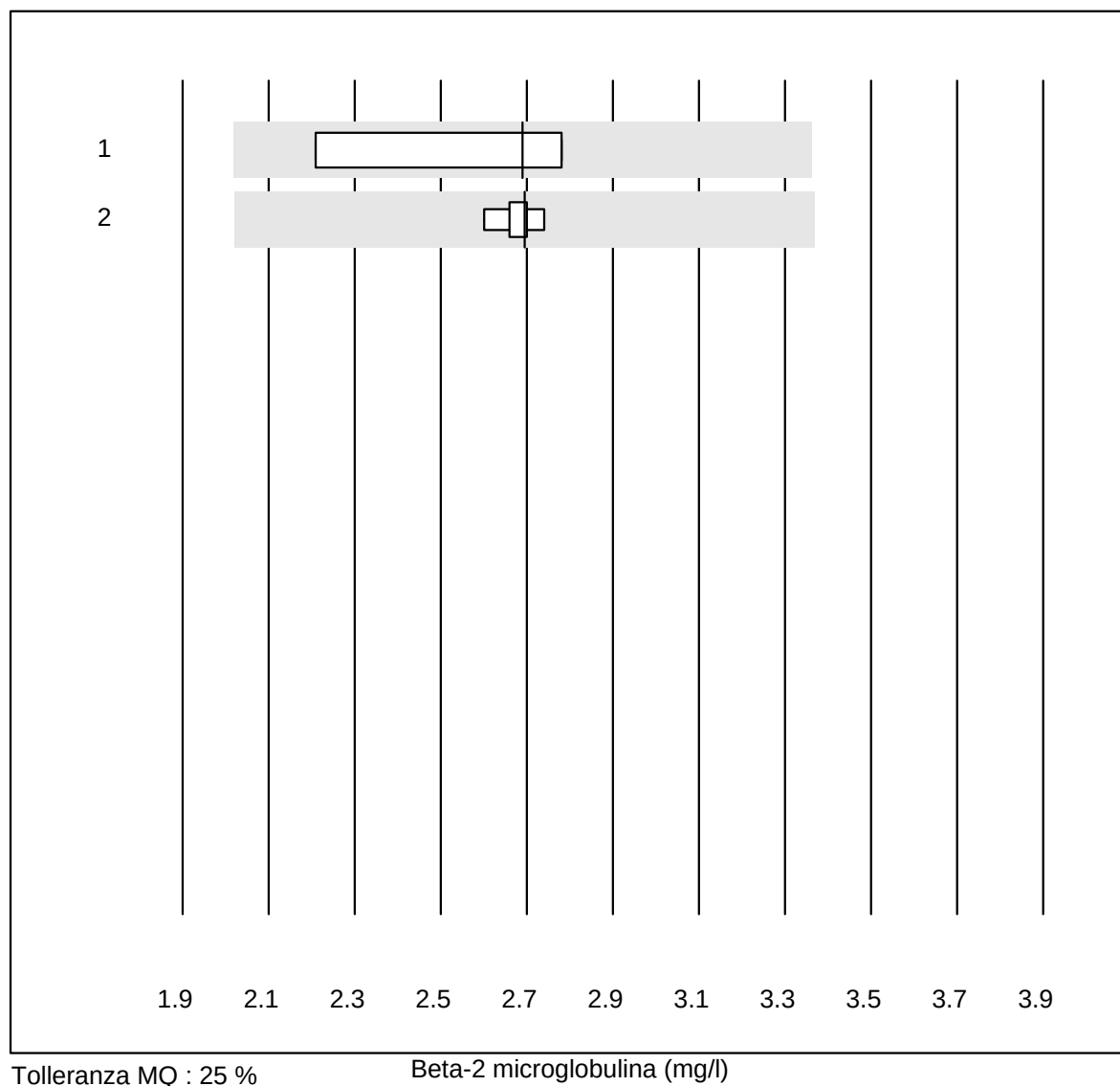Beta-2 microglobulina

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	2.69	10.4	e*
2 Roche	6	100.0	0.0	0.0	2.70	1.8	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Fattore reumatoide

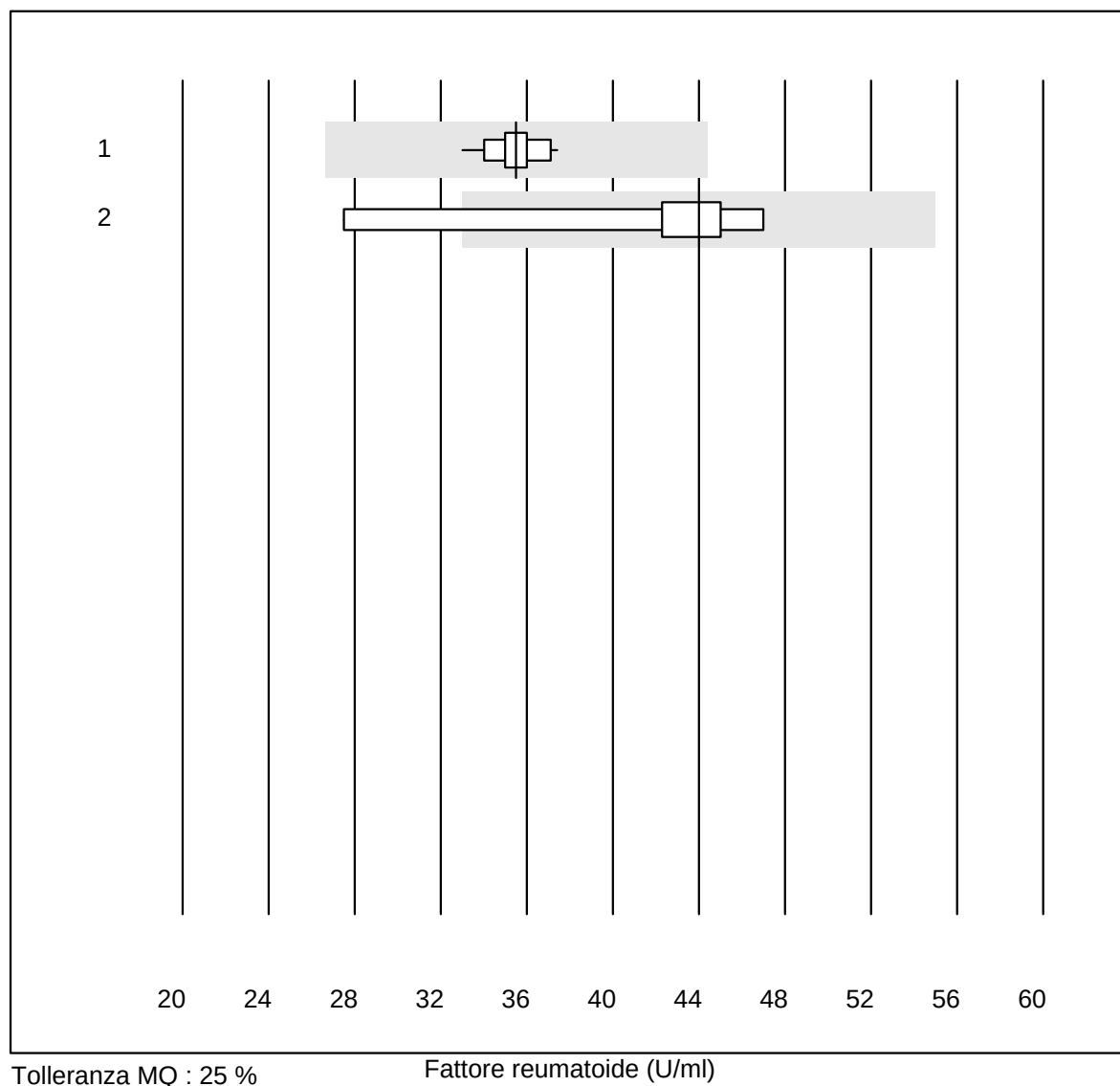


Tolleranza MQ : 25 %

Fattore reumatoide (U/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	13	100.0	0.0	0.0	35.5	3.3	e
2 Abbott	7	85.7	14.3	0.0	44.0	15.6	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ceruloplasmina

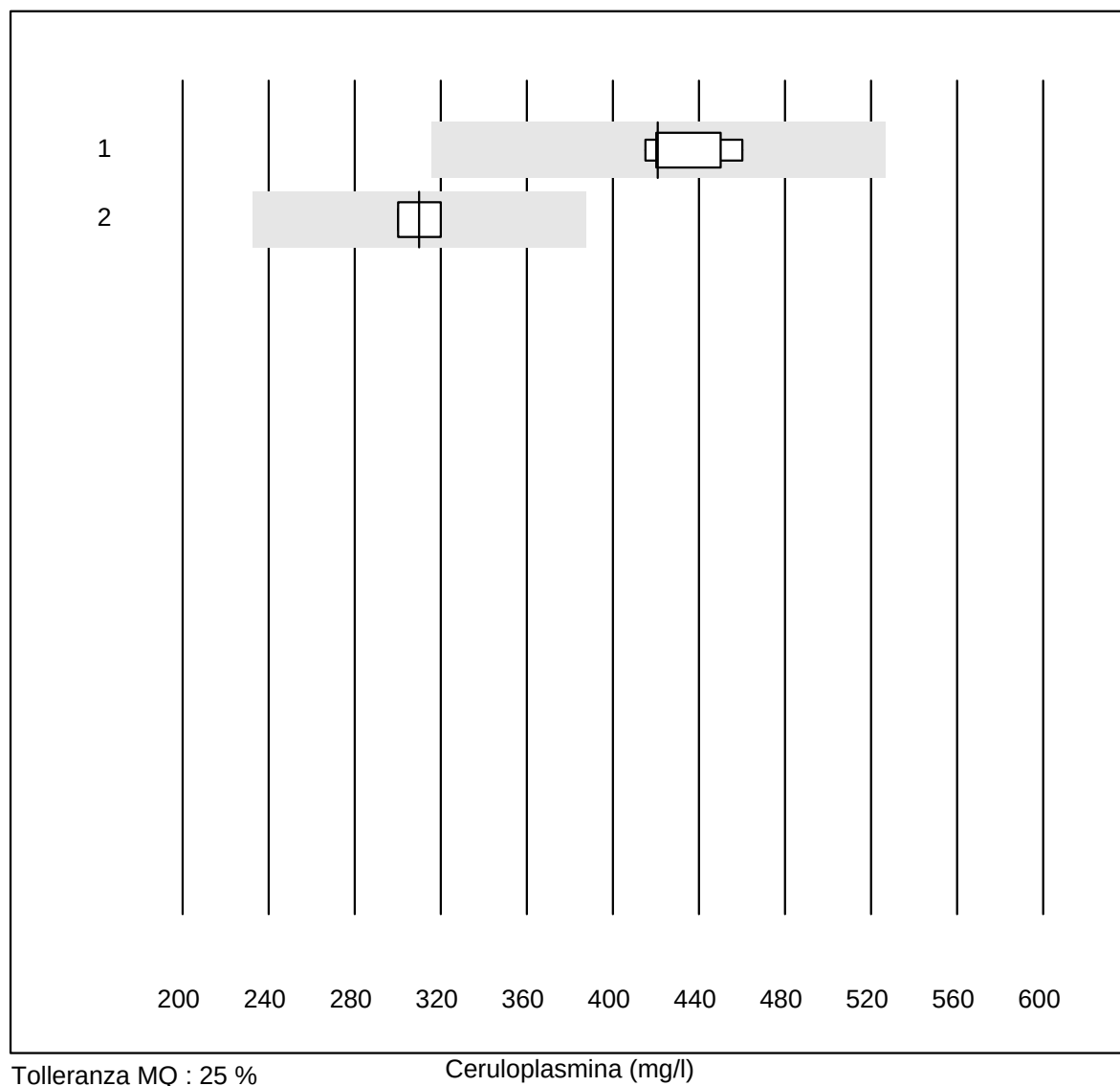


Tolleranza MQ : 25 %

Ceruloplasmina (mg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	421.00	4.7	e
2	Roche	5	100.0	0.0	0.0	310.00	3.2	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Prealbumina

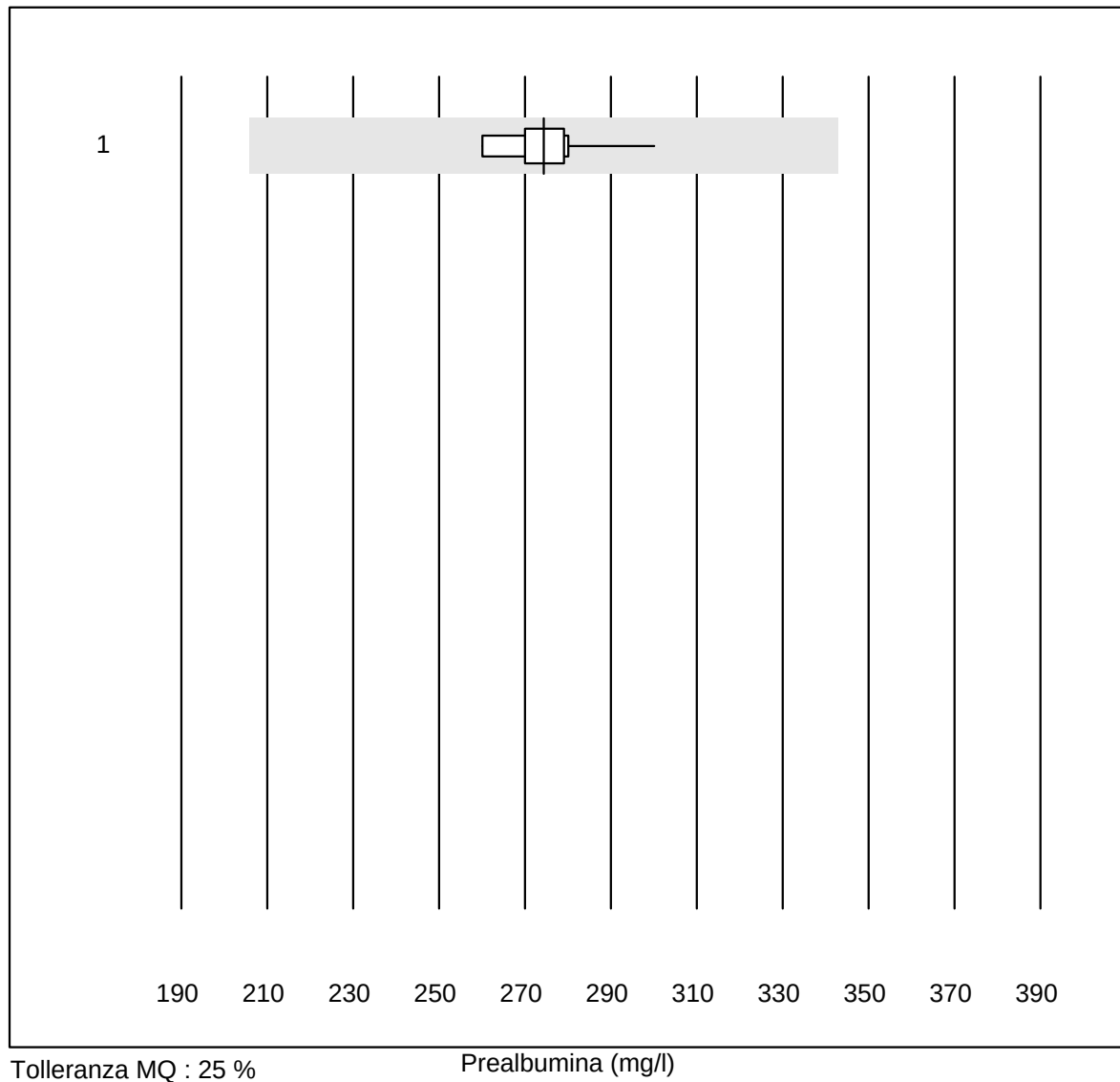


Tolleranza MQ : 25 %

Prealbumina (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	10	100.0	0.0	0.0	274.30	3.8	e

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

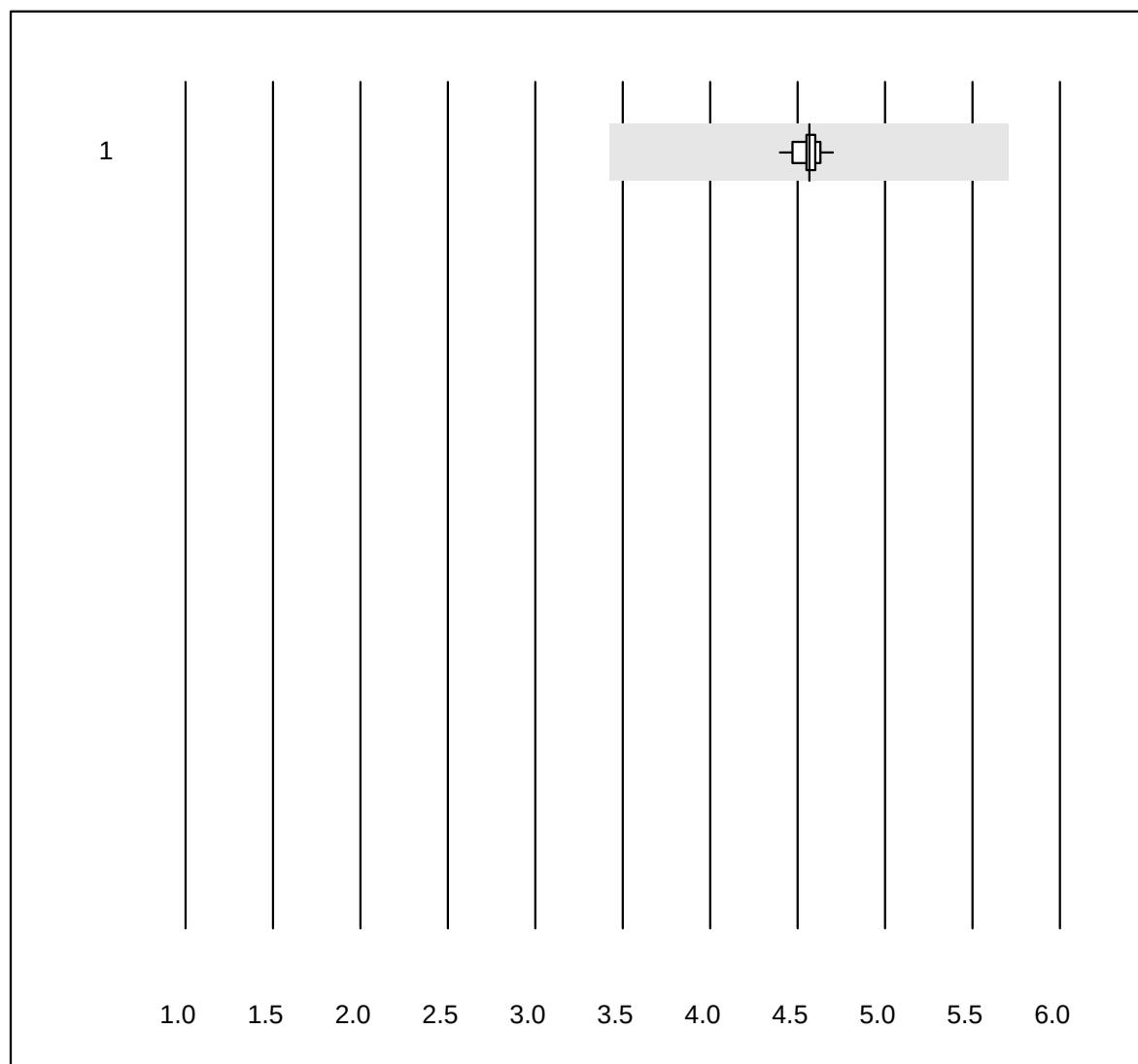
Recettore solubile della transferrina

Tolleranza MQ : 25 %


Recettore solubile della transferrina (mg/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	15	100.0	0.0	0.0	4.6	1.6	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

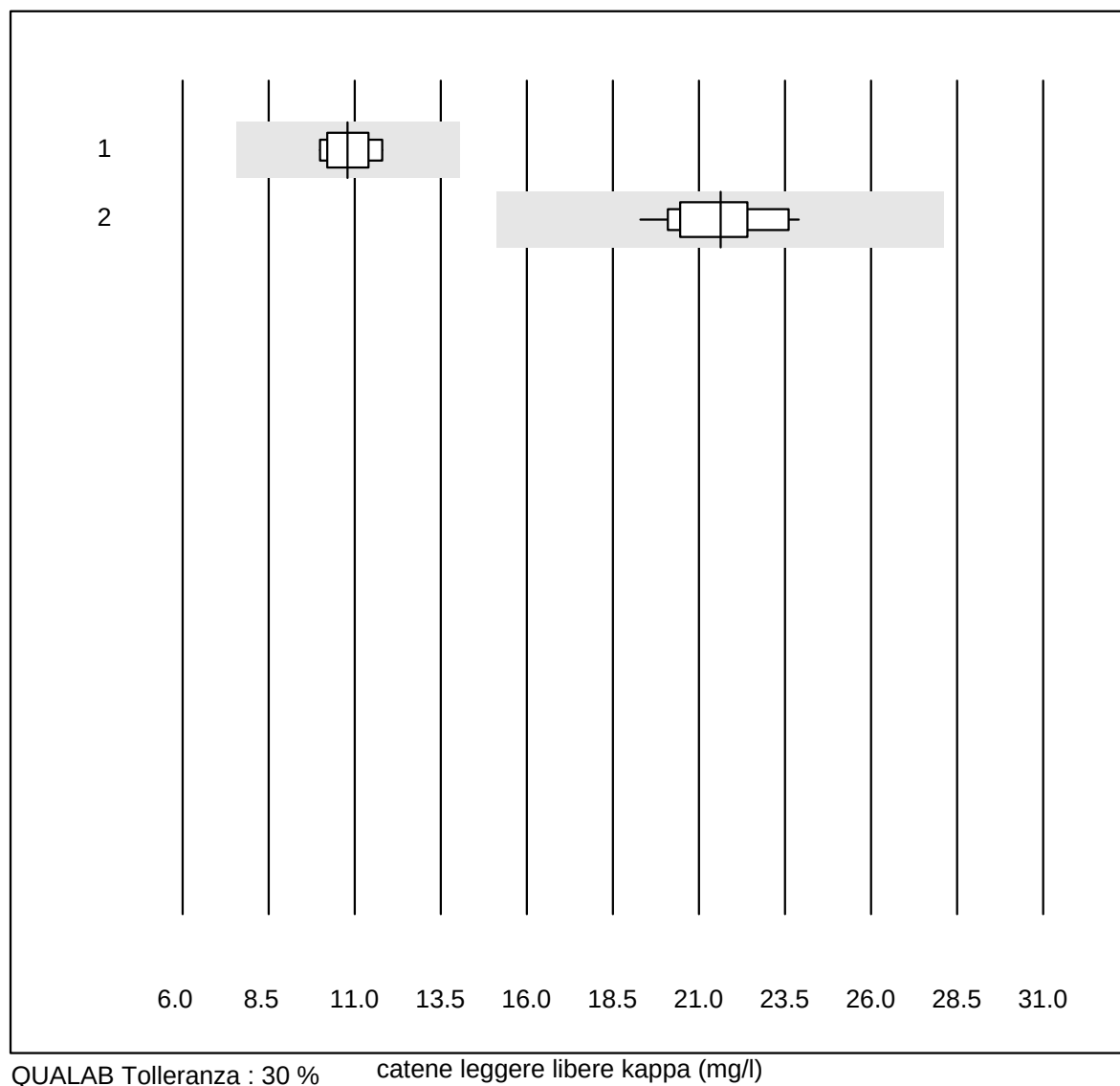catene leggere libere kappa


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 N Latex	7	100.0	0.0	0.0	10.80	6.1	e
2 Freelite	14	100.0	0.0	0.0	21.64	6.2	e

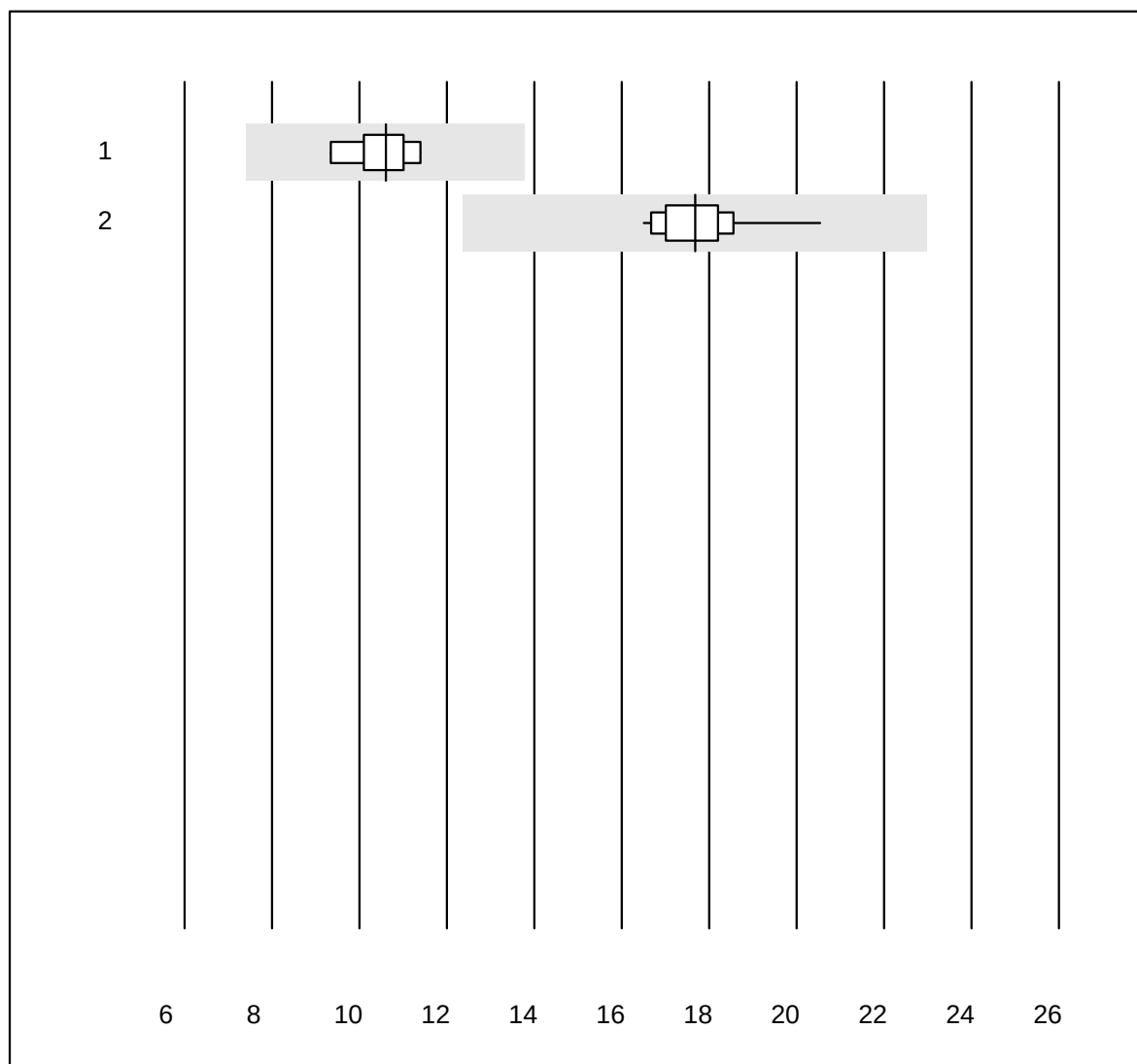catene leggere libere lambda

QUALAB Tolleranza : 30 % catene leggere libere lambda (mg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	N Latex	7	100.0	0.0	0.0	10.60	6.3	e
2	Freelite	14	100.0	0.0	0.0	17.68	5.8	e

IgE Arachidi qn

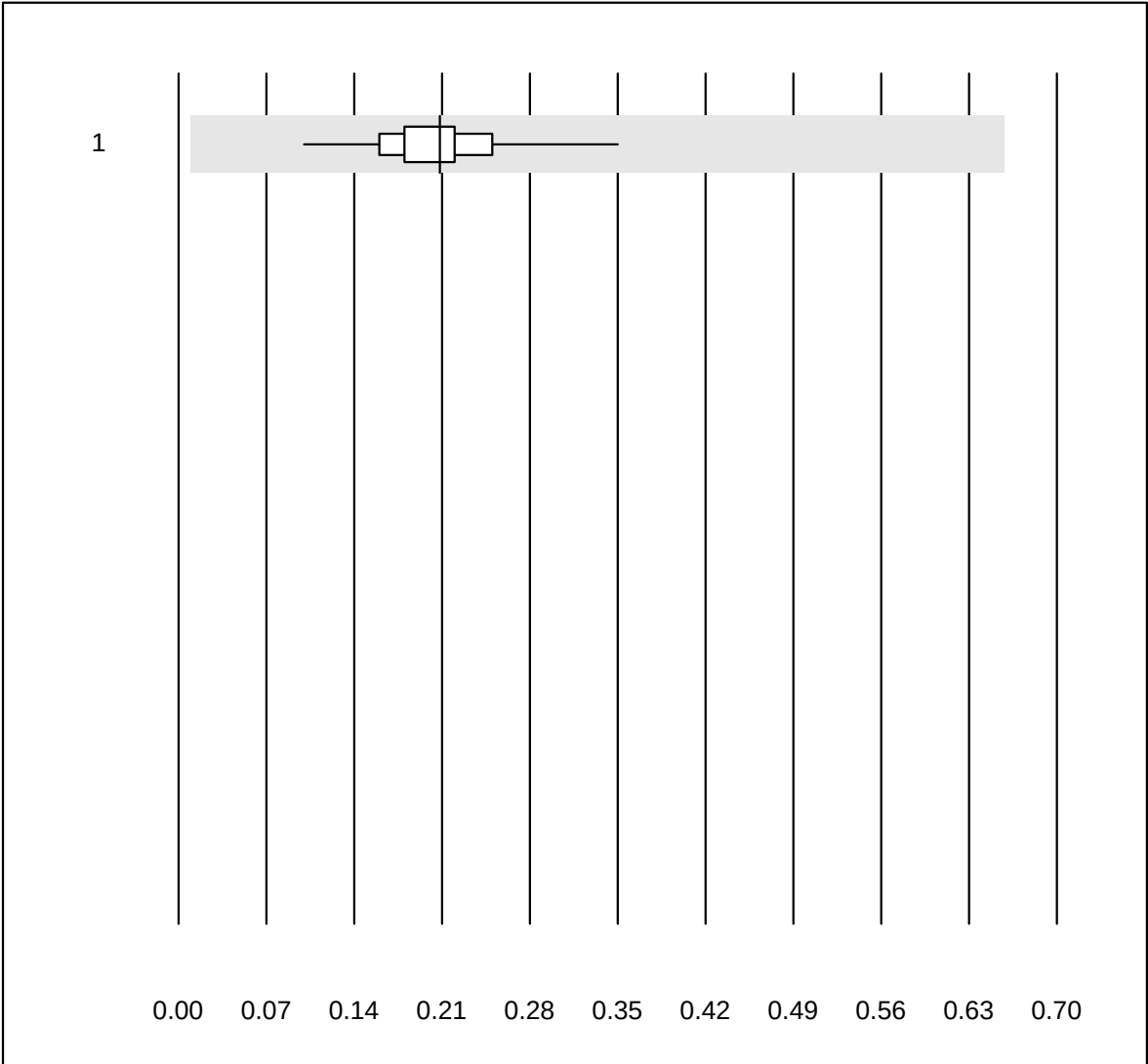


Tolleranza MQ : 30 %
(< 1.50: +/- 0.45 kU/L)

IgE Arachidi qn (kU/L)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	13	100.0	0.0	0.0	0.21	27.7	e*

IgE Betulla, qn

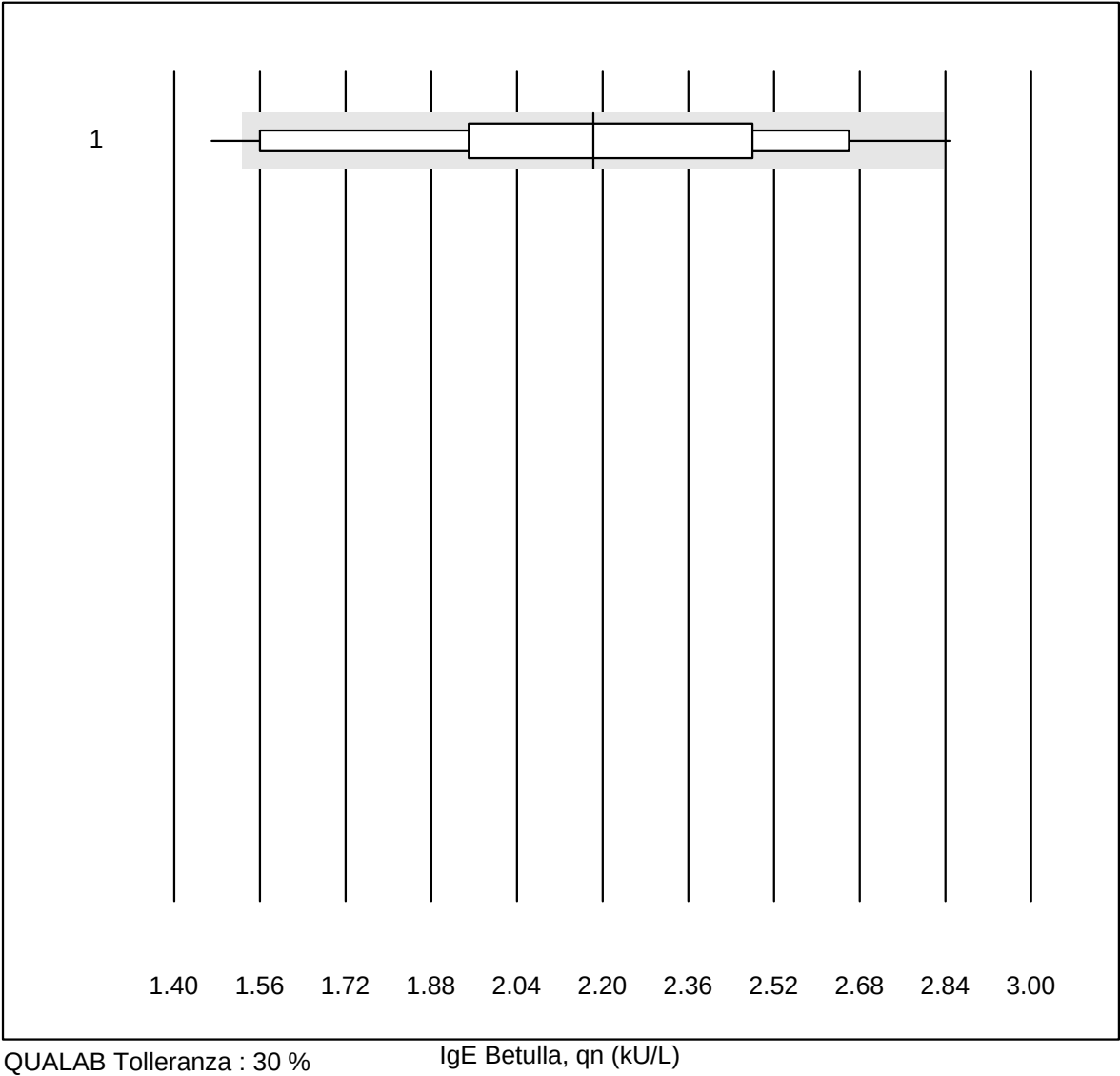

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	14	78.6	14.3	7.1	2.18	19.3	e*

IgE Epitelio di gatto, qn

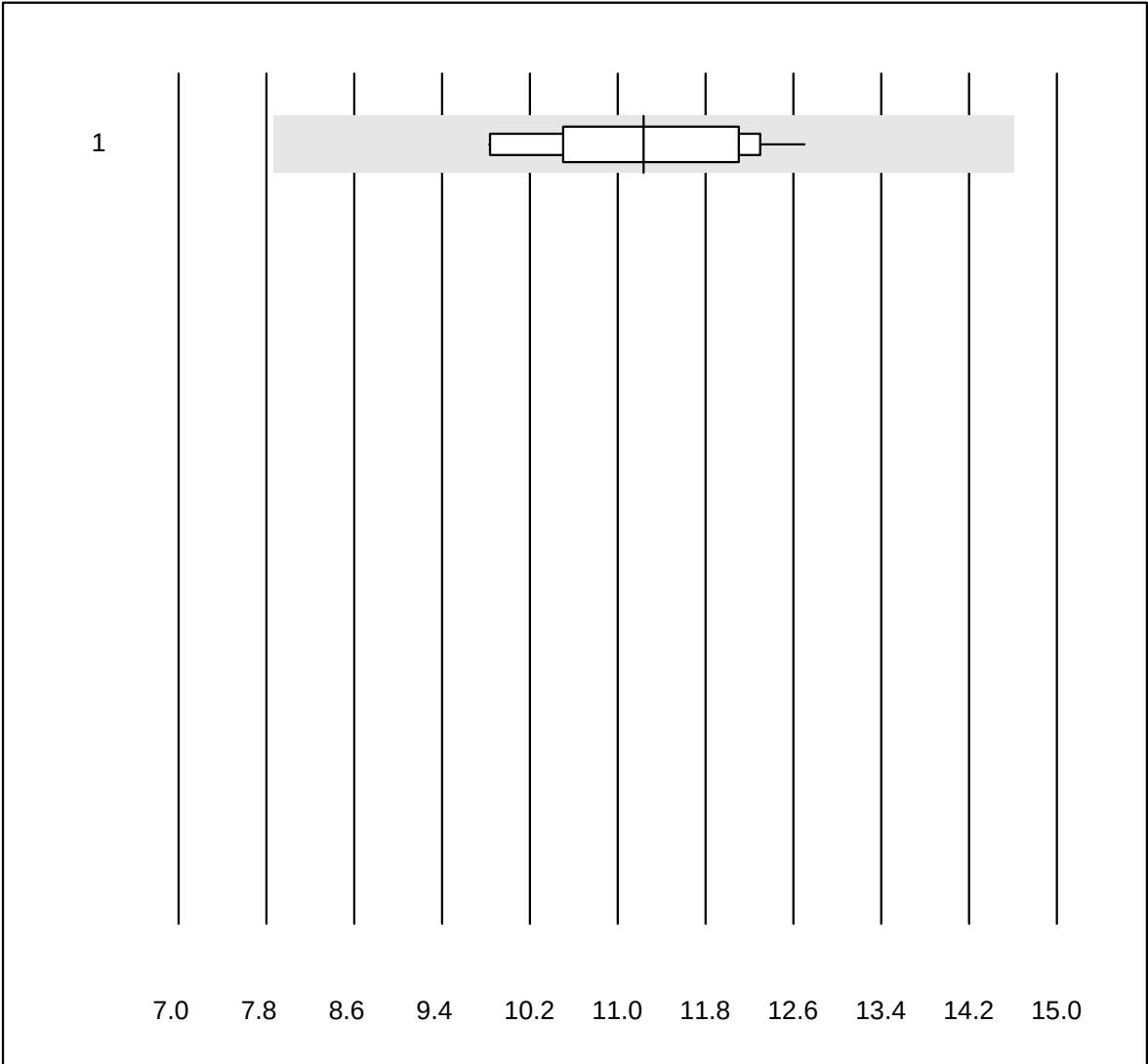


QUALAB Tolleranza : 30 %

IgE Epitelio di gatto, qn (kU/L)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	13	100.0	0.0	0.0	11.24	8.5	e

IgE totale

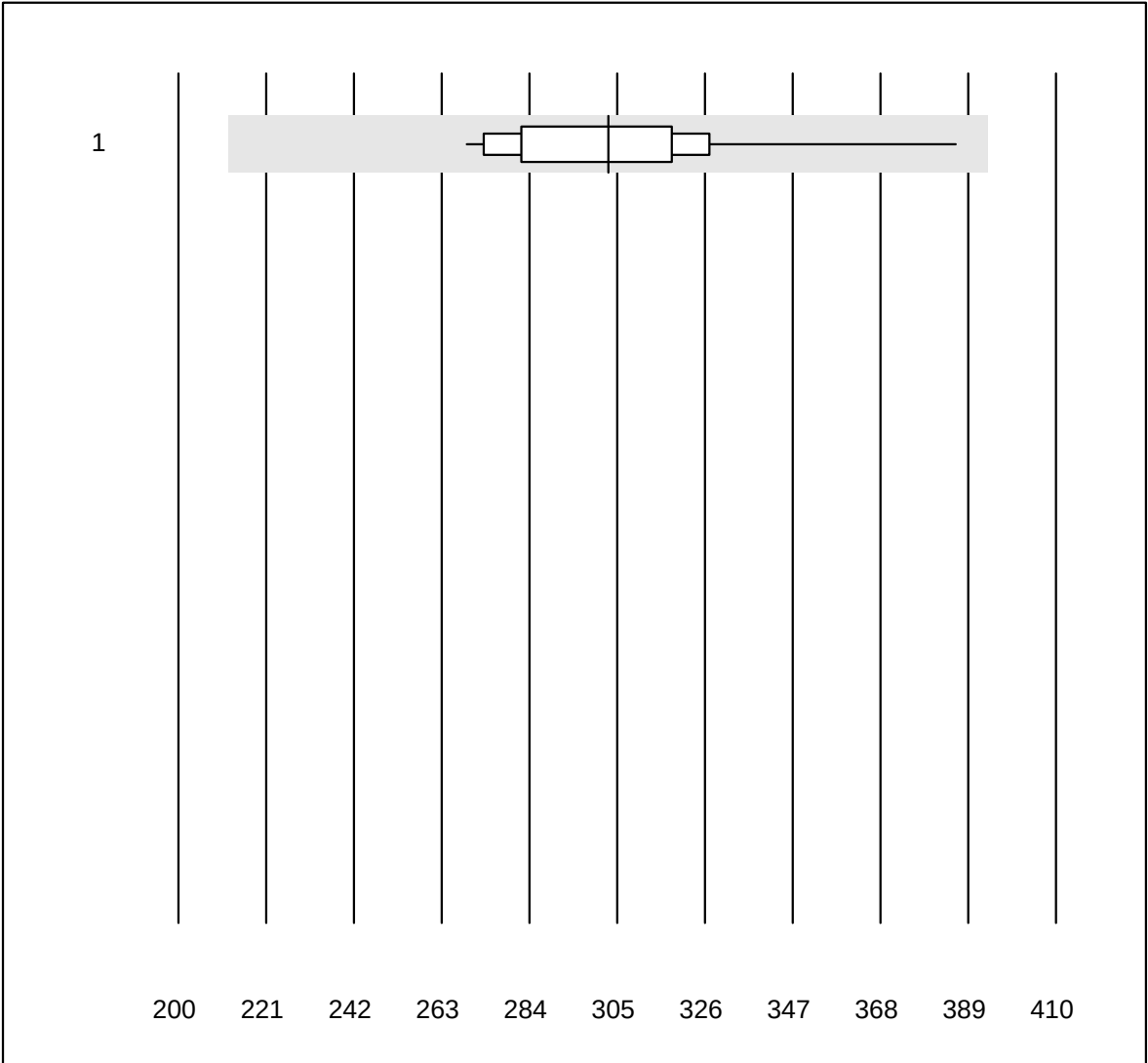


QUALAB Tolleranza : 30 %

IgE totale (kU/L)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	14	100.0	0.0	0.0	303	10.0	e

IgE sx1 qn

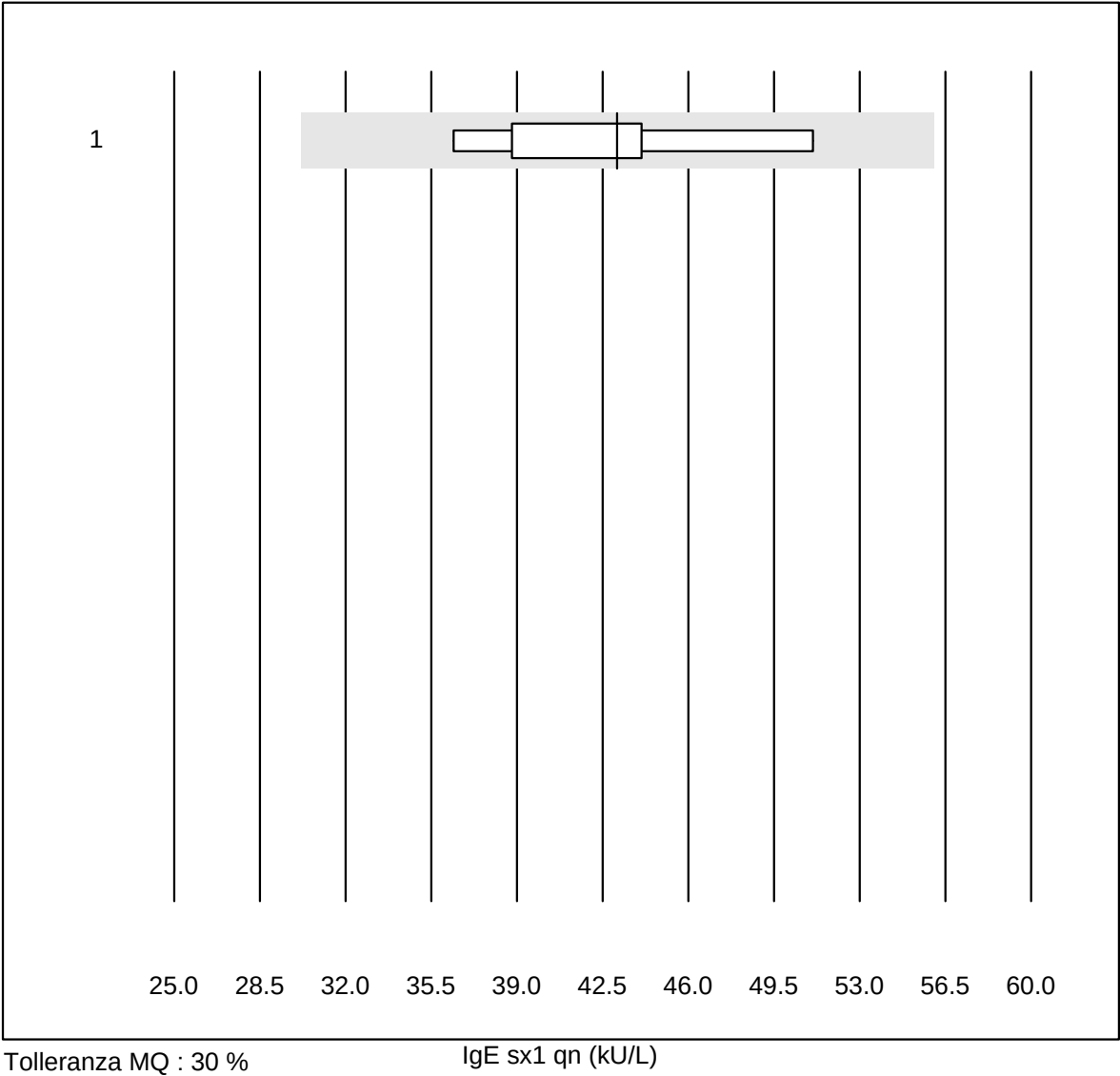

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	9	100.0	0.0	0.0	43.10	10.1	e

IgE fx5 qn

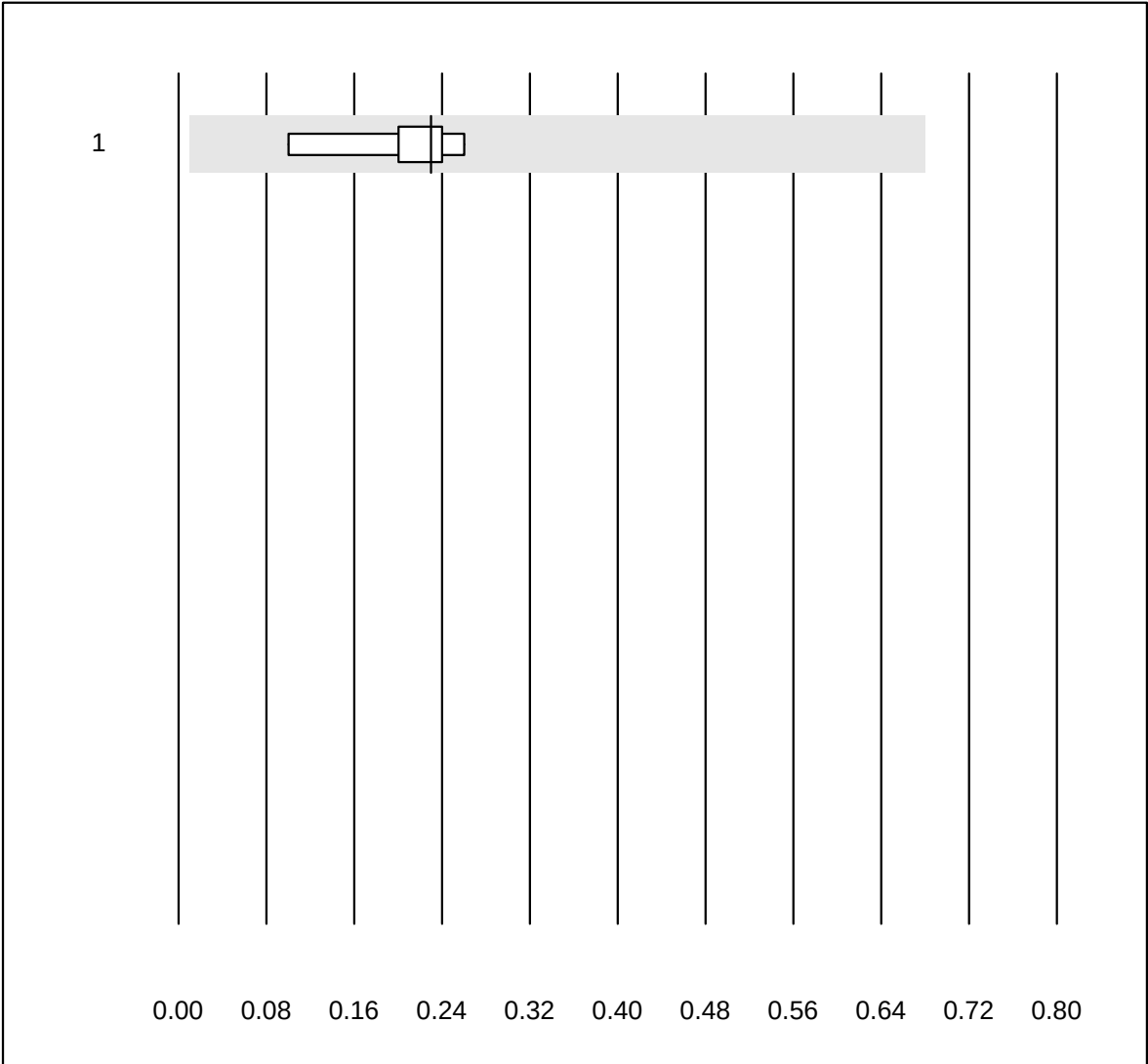


Tolleranza MQ : 30 %
(< 1.50: +/- 0.45 kU/L)

IgE fx5 qn (kU/L)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	9	100.0	0.0	0.0	0.23	25.1	e*

IgE rx1qn

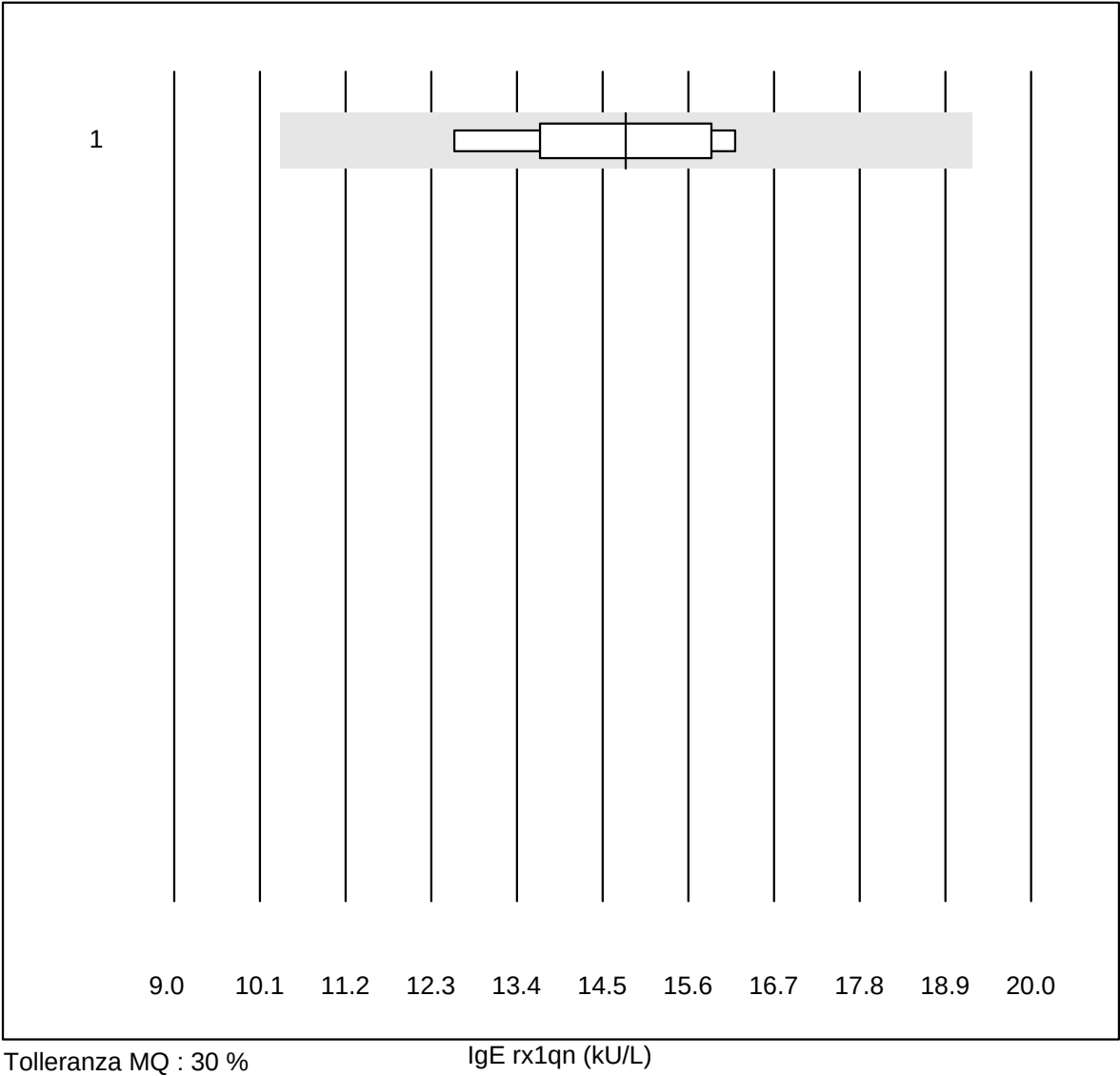


Tolleranza MQ : 30 %

IgE rx1qn (kU/L)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	7	100.0	0.0	0.0	14.80	8.8	e

IgE rx2 qn

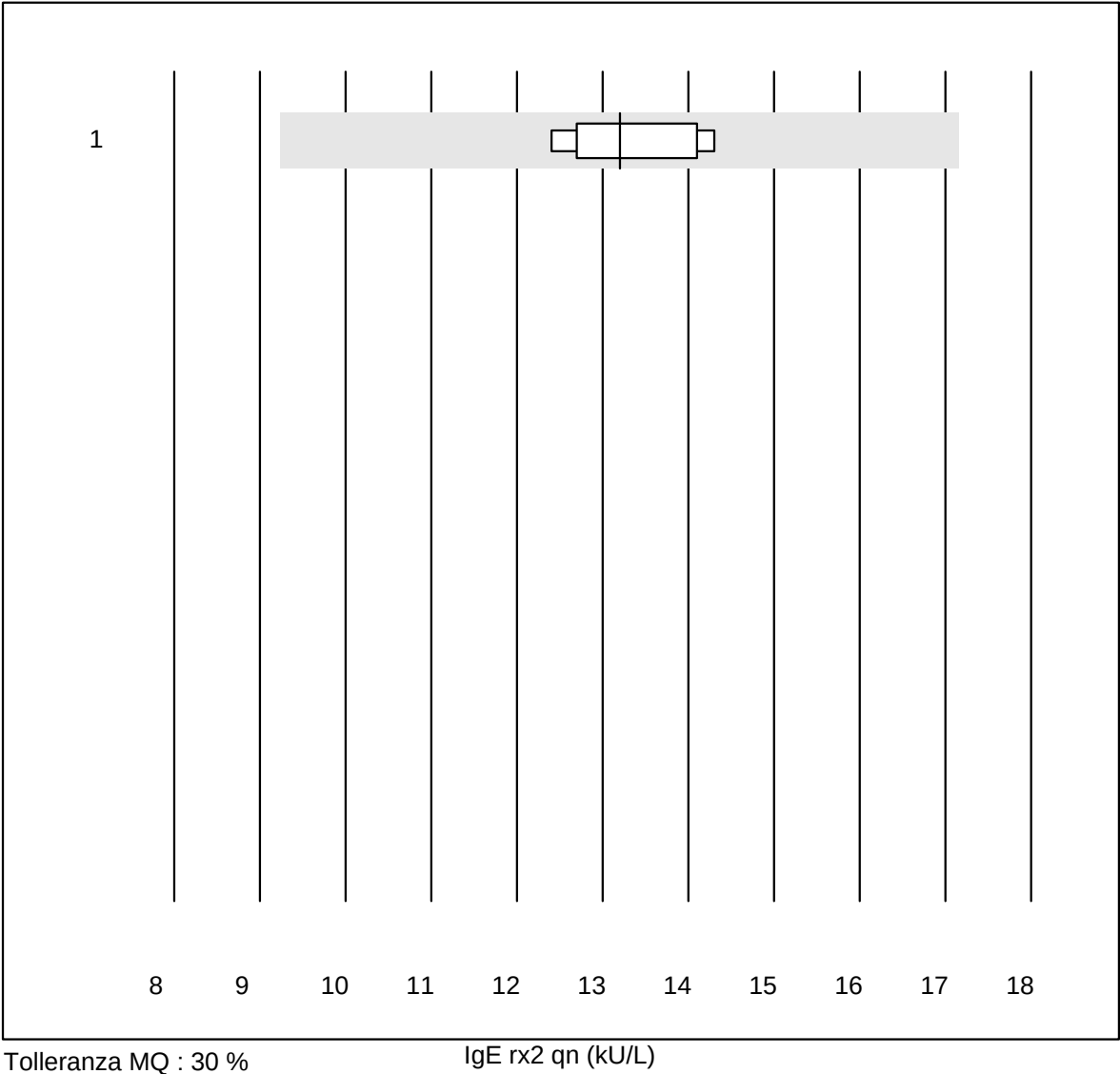

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	7	100.0	0.0	0.0	13.20	5.4	e

IgE D. pteronyssinus qn

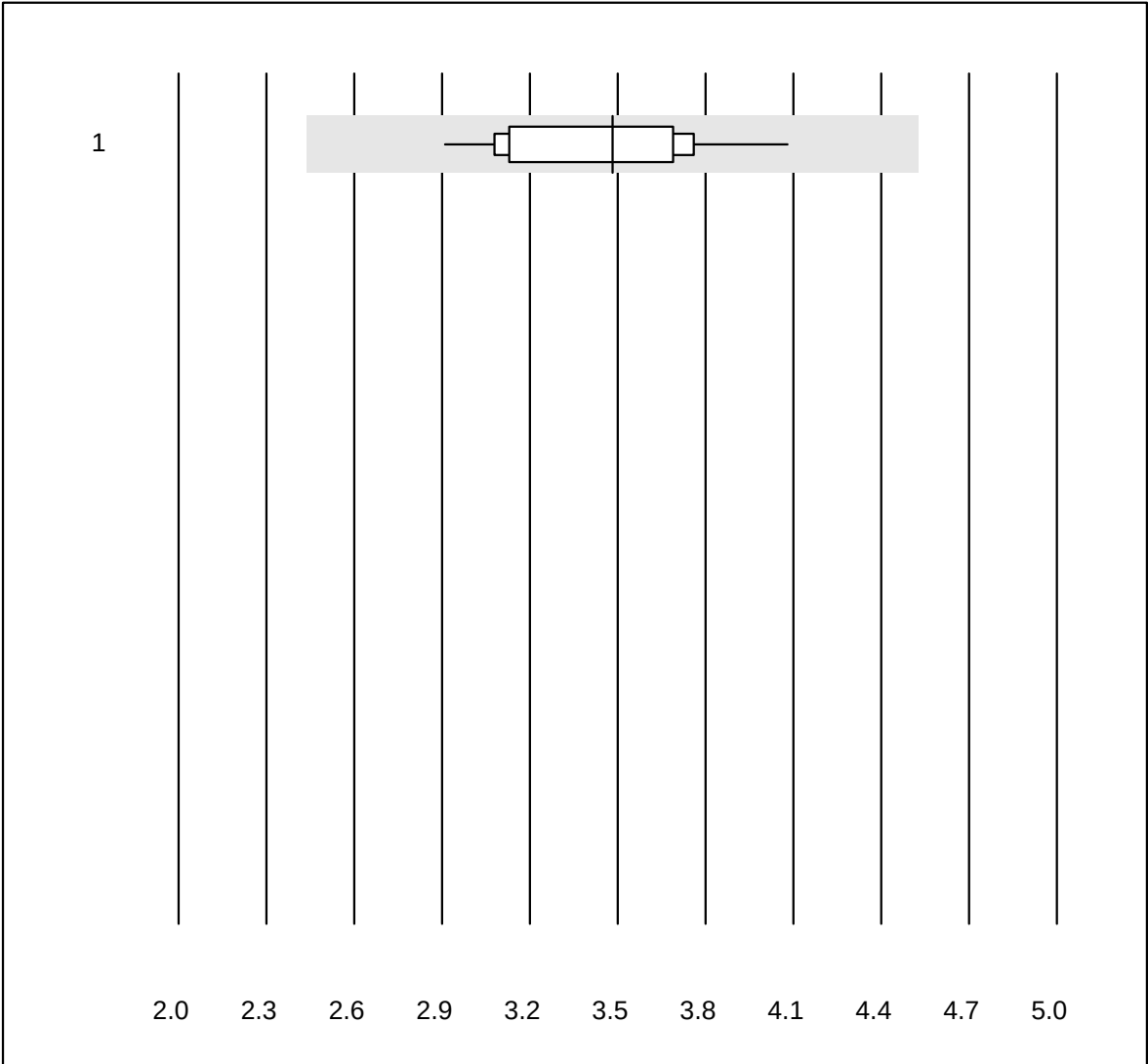


QUALAB Tolleranza : 30 %

IgE D. pteronyssinus qn (kU/L)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	3.48	9.8	e

CRP HS

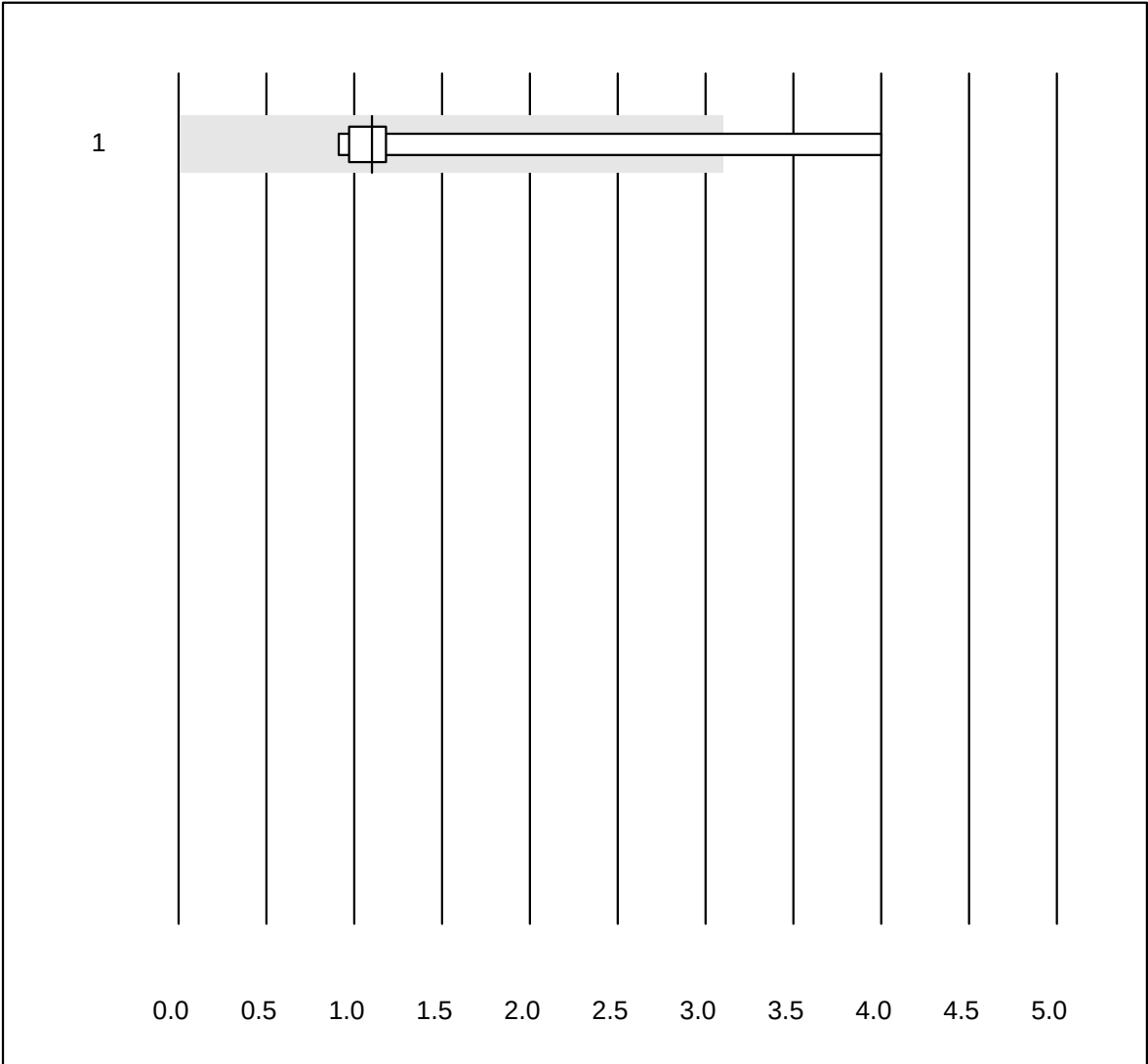


QUALAB Tolleranza : 21 %
(< 10.00: +/- 2.00 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetria	8	87.5	12.5	0.0	1.10	72.1	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

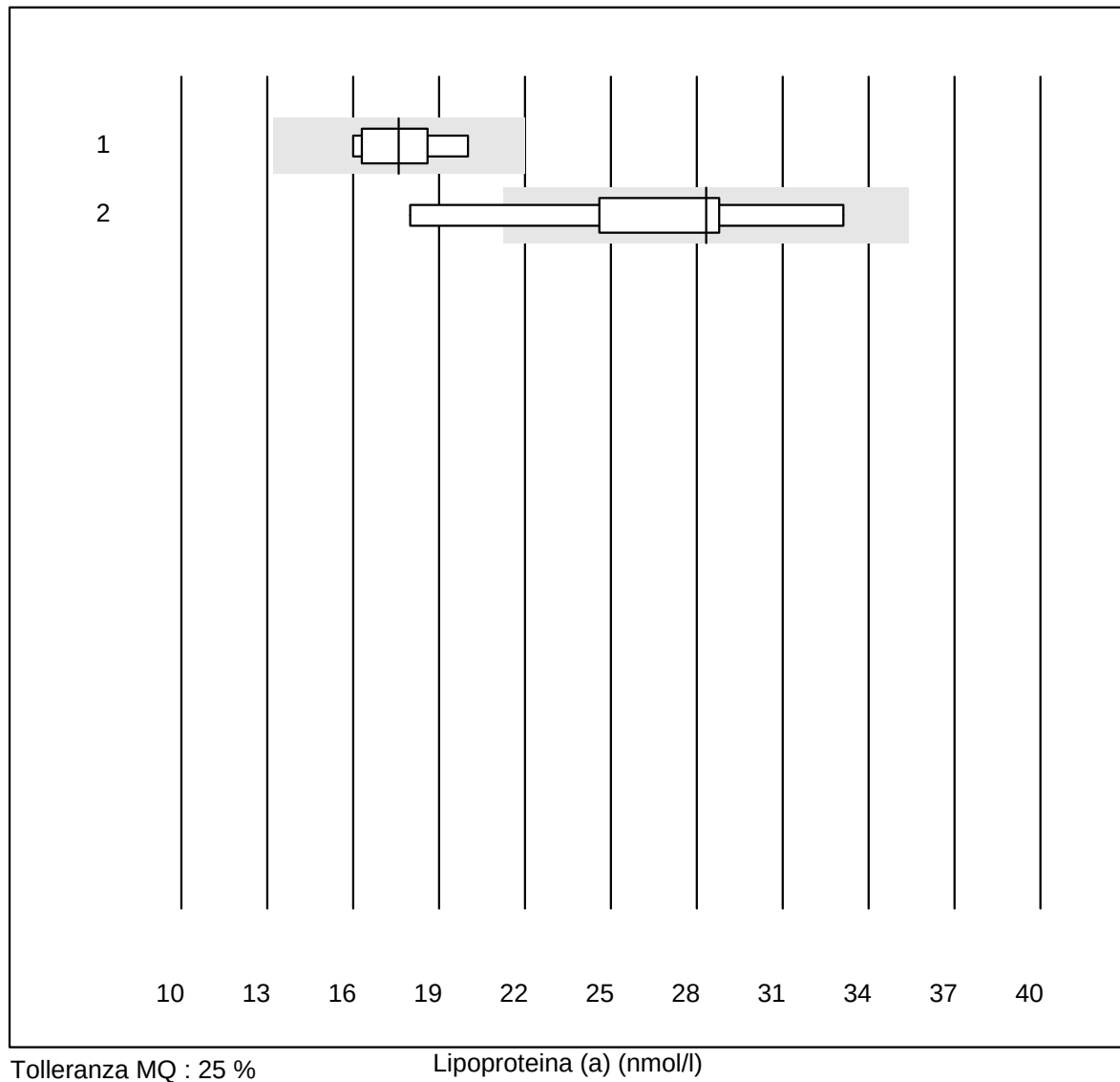
Lipoproteina (a)

Tolleranza MQ : 25 %

Lipoproteina (a) (nmol/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	13	100.0	0.0	0.0	18	8.5	e
2	Altri	5	80.0	20.0	0.0	28	21.3	e*

Apolipoproteina A1

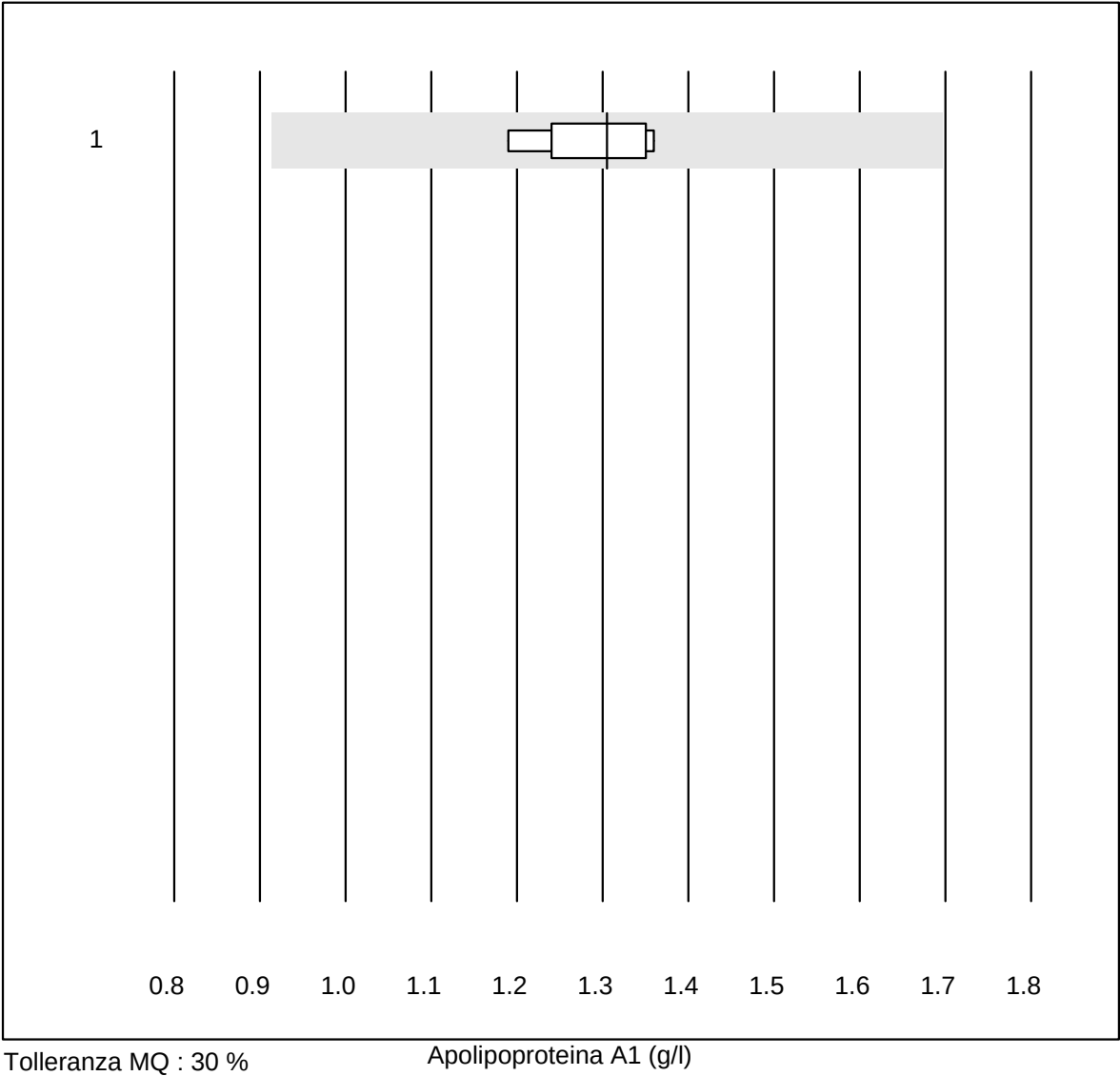

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	1.31	5.2	e

Apolipoproteina B

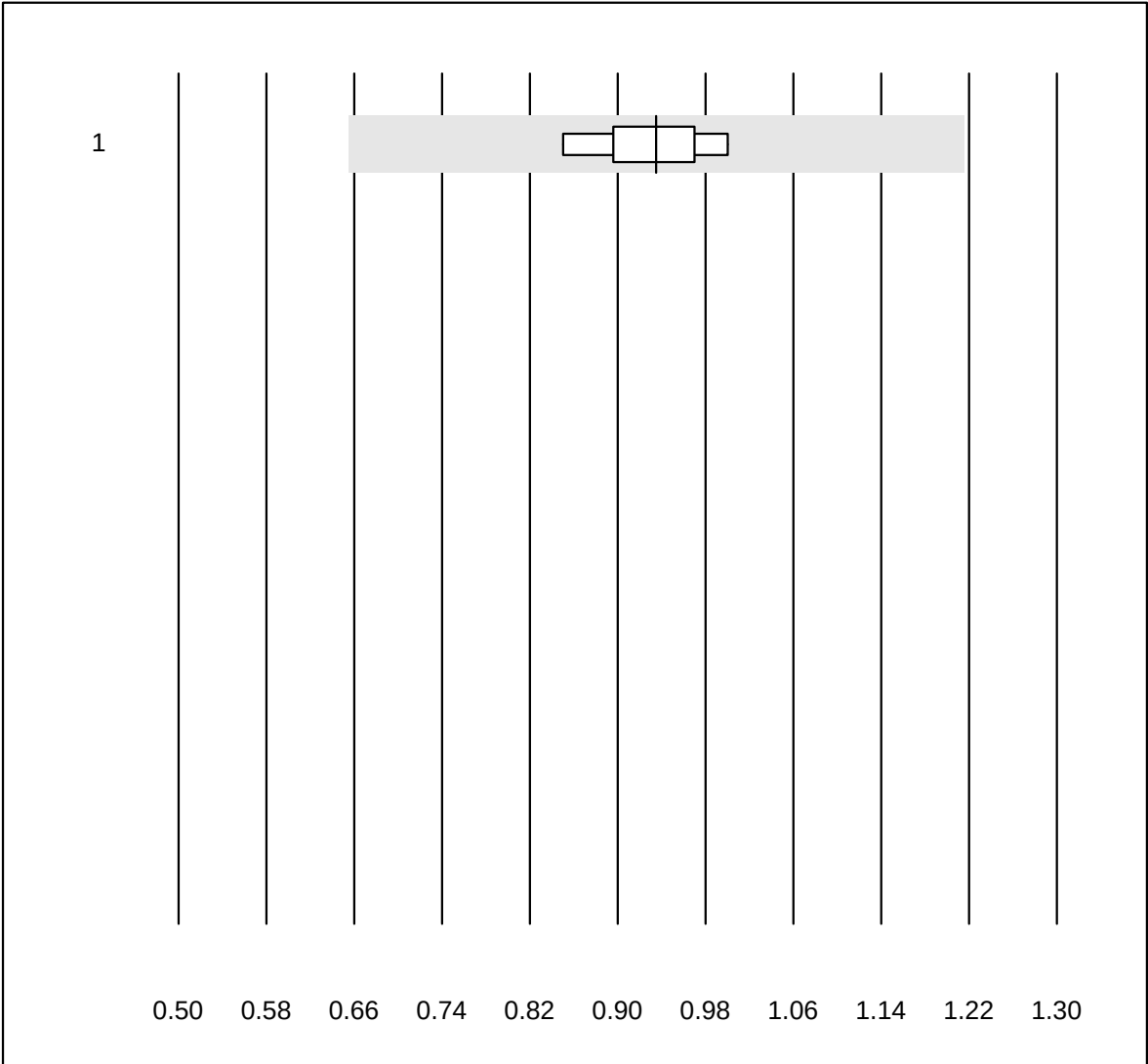


Tolleranza MQ : 30 %

Apolipoproteina B (g/l)


No.Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	0.9	6.2	e

CRP

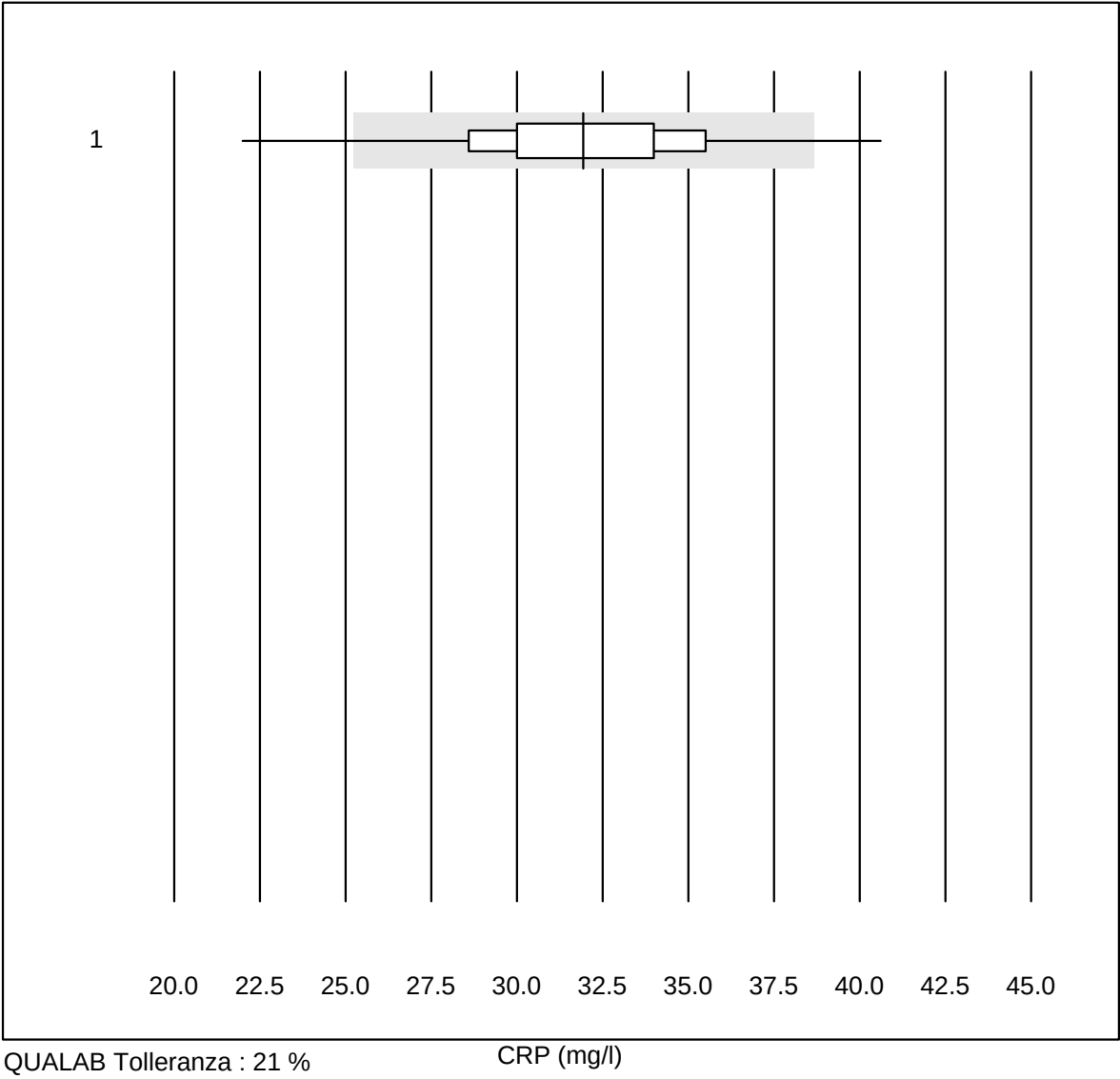

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	AFIAS	242	94.2	3.7	2.1	31.9	8.9	e


IgG anti gliadina deam.

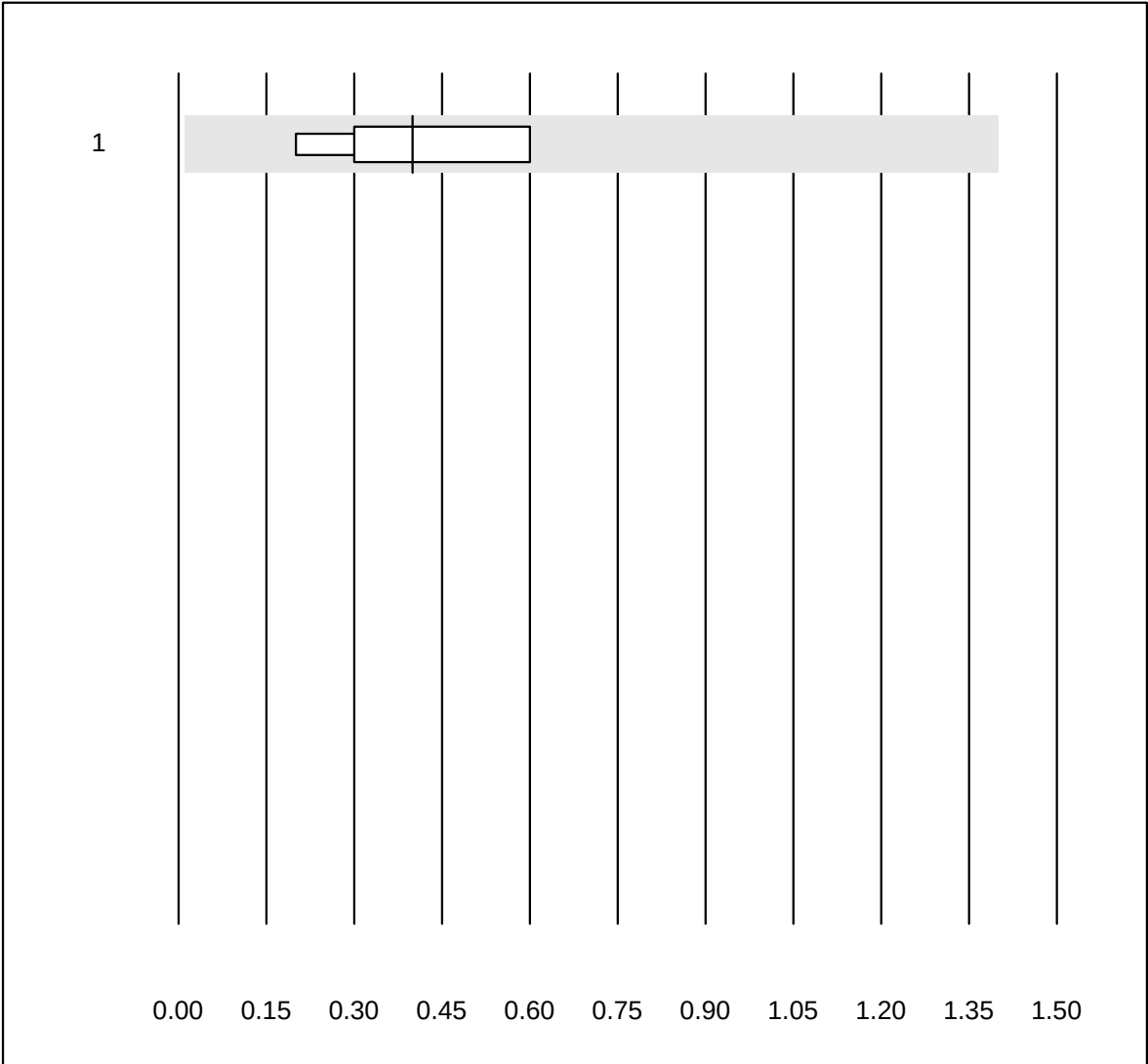

Tolleranza MQ : 30 %
(< 2.00: +/- 1.00 U/ml)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Phadia	7	100.0	0.0	0.0	0.40	36.5	e*
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

IgA anti gliadina deam.

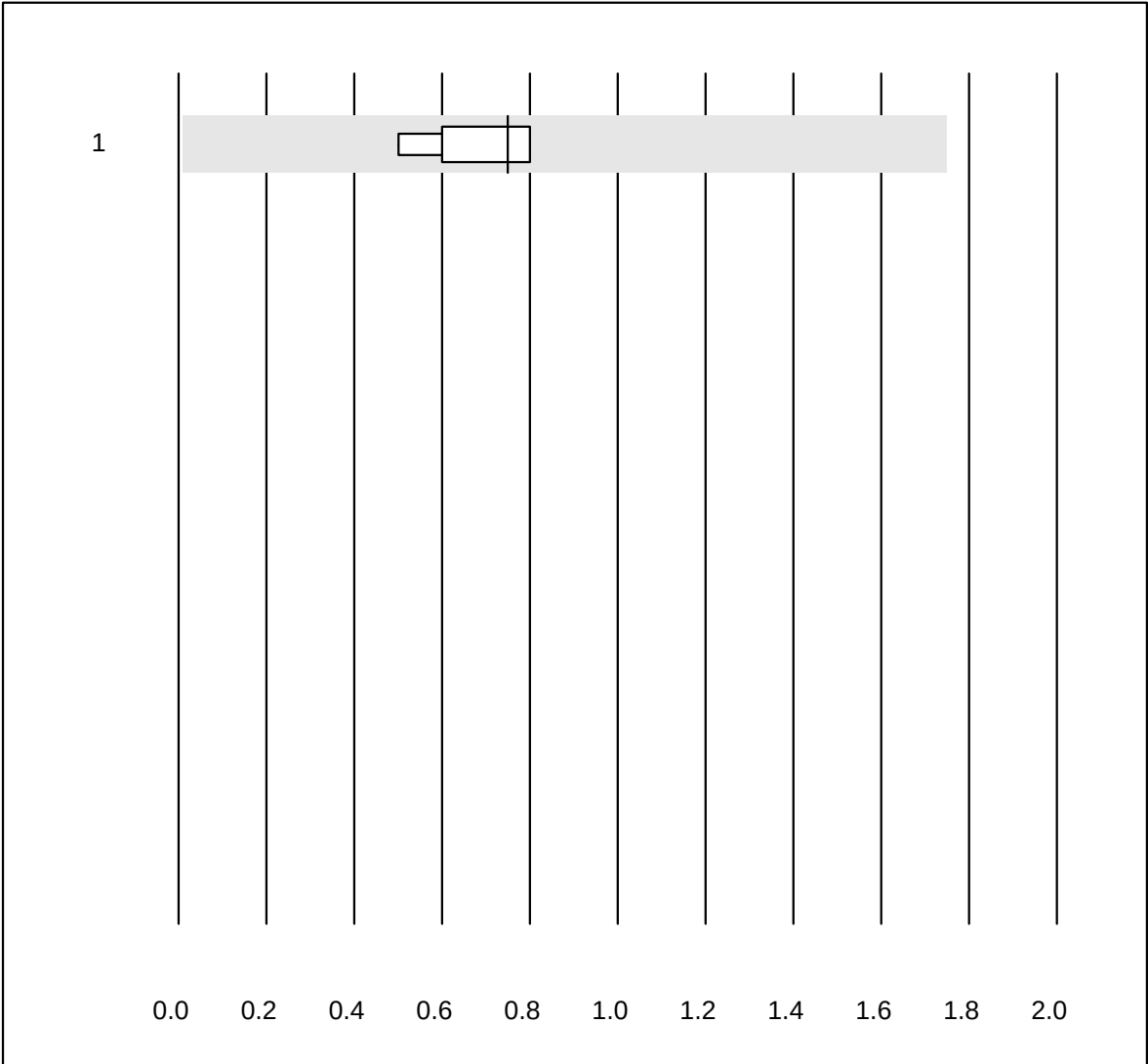


Tolleranza MQ : 30 %
(< 2.00: +/- 1.00 U/ml)

IgA anti gliadina deam. (U/ml)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Phadia	6	100.0	0.0	0.0	0.75	18.1	e*
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


IgG anti tTG

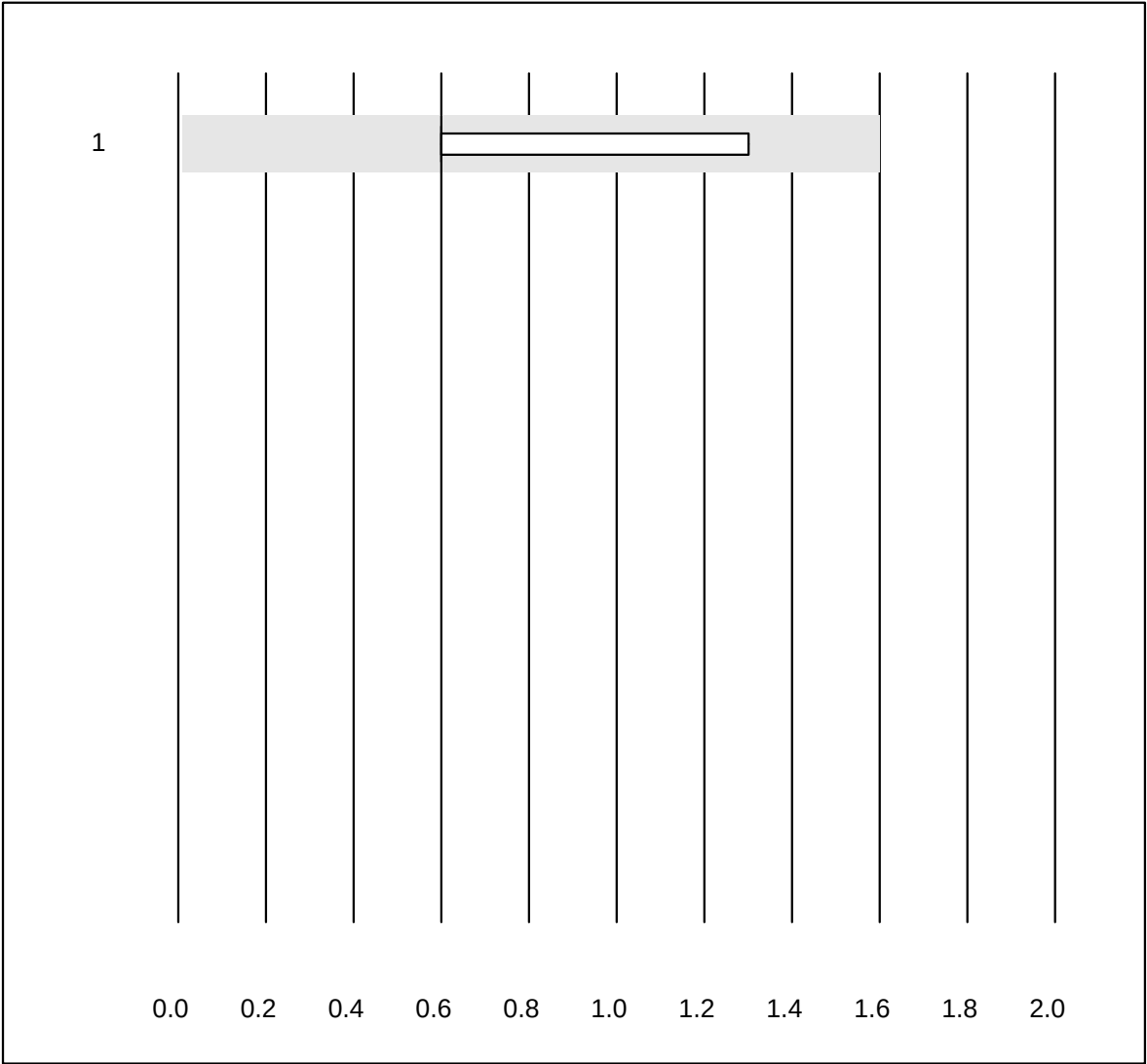

Tolleranza MQ : 30 %
(< 2.00: +/- 1.00 U/ml)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	0.60	45.2	e*

IgA anti tTG

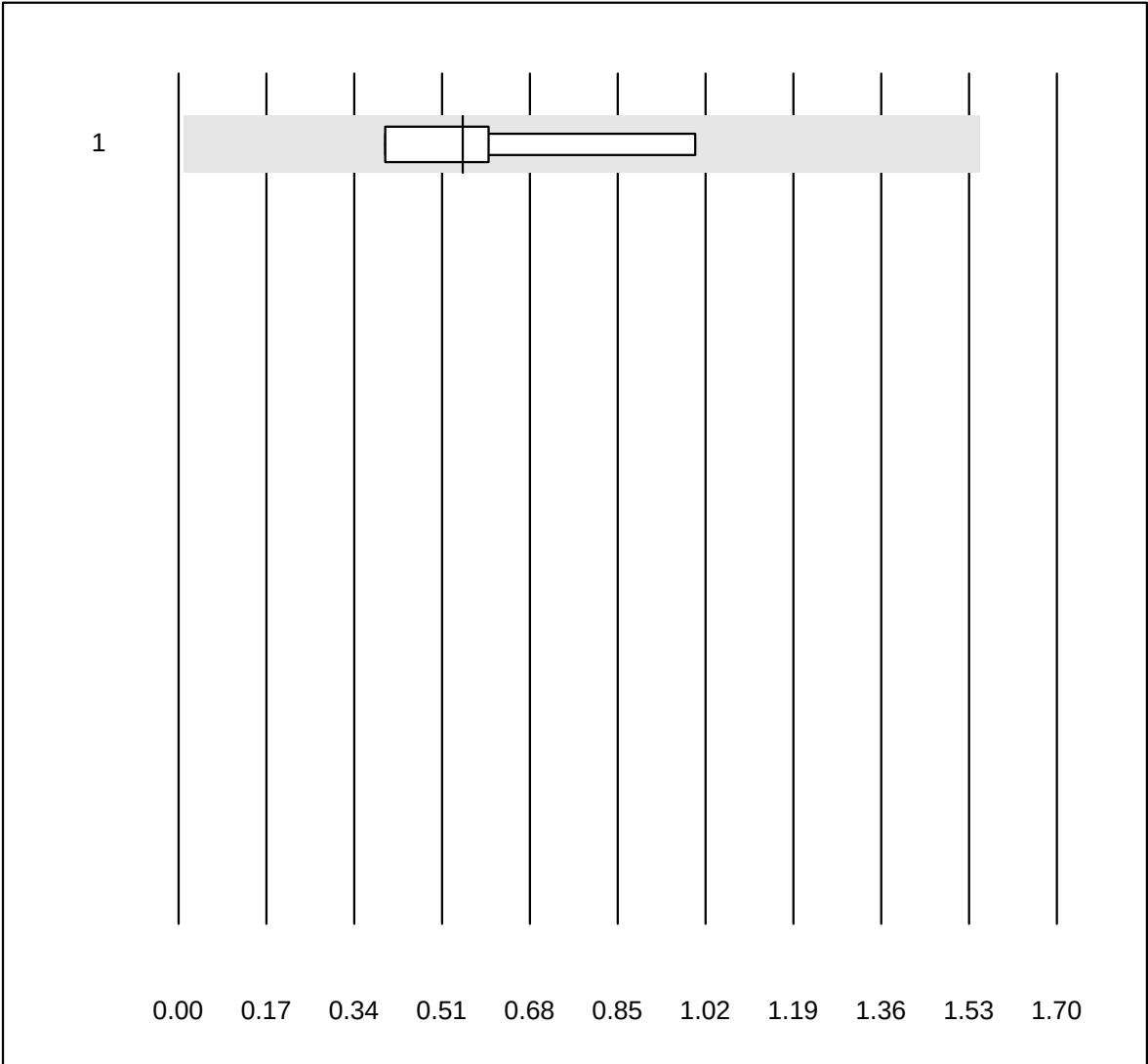


Tolleranza MQ : 30 %
(< 2.00: +/- 1.00 U/ml)

IgA anti tTG (U/ml)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	0.55	36.4	e*
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

CRP Lumira

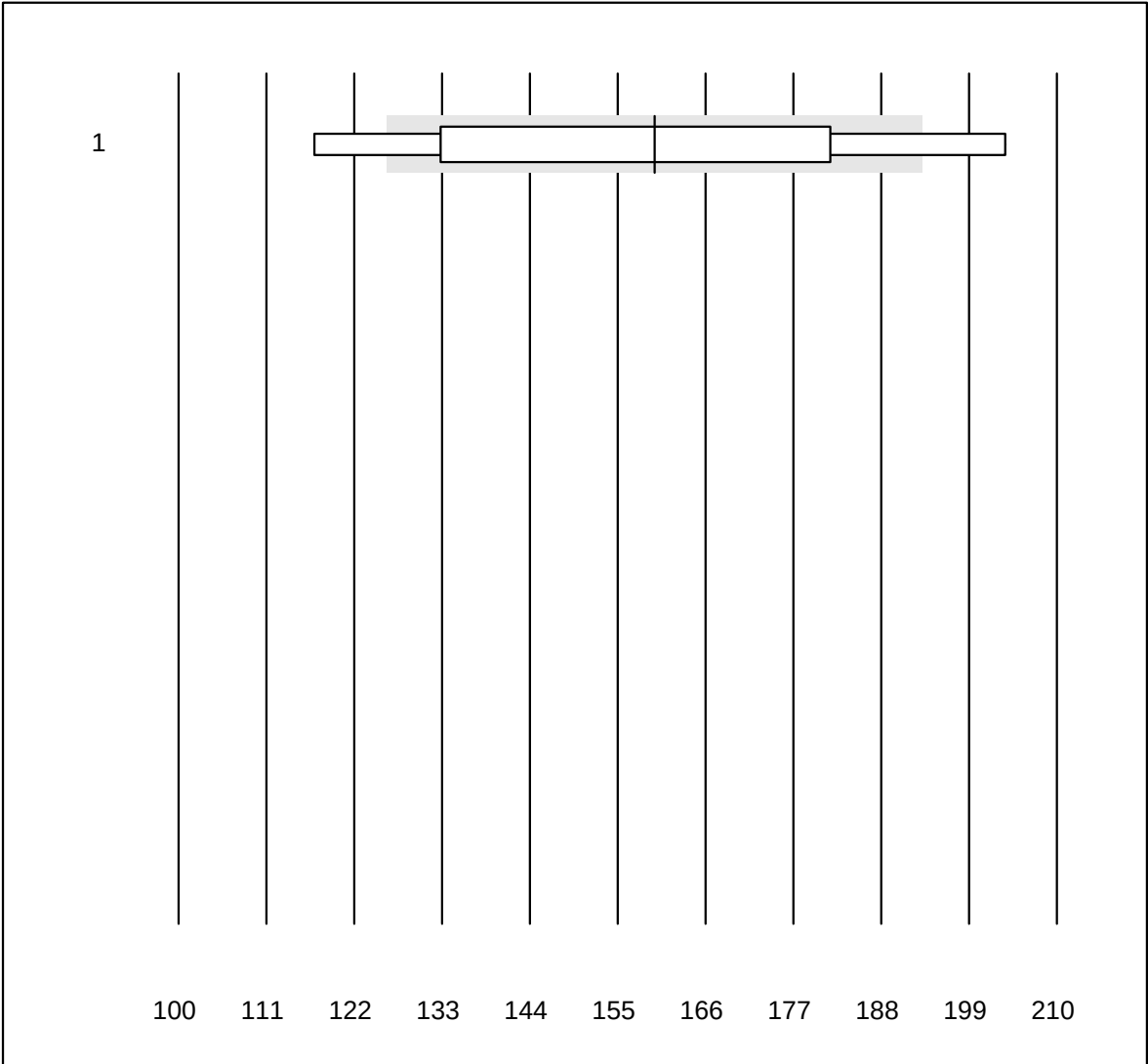


QUALAB Tolleranza : 21 %

CRP Lumira (mg/l)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Lumira Dx	7	71.4	28.6	0.0	159.6	19.1	e*


Albumina

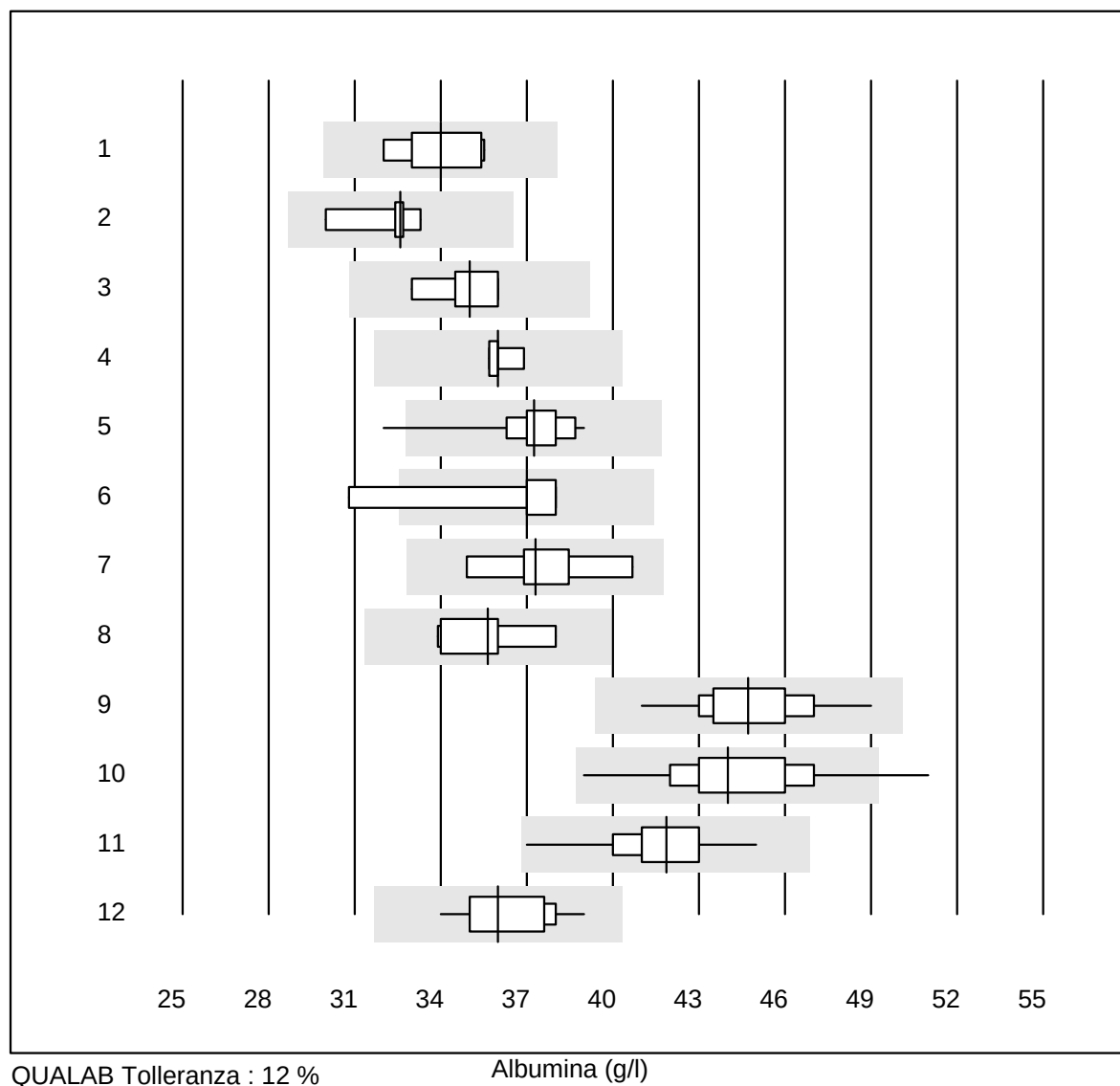

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Turbidimetria	6	100.0	0.0	0.0	34.0	4.0	e*
2 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	32.6	4.0	e*
3 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	35.0	2.8	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	36.0	1.4	e
5 Roche	34	97.1	2.9	0.0	37.3	4.1	e
6 Siemens	5	80.0	20.0	0.0	37.0	8.4	e*
7 Autolyser	9	100.0	0.0	0.0	37.3	4.4	e*
8 Selectra Pro	9	100.0	0.0	0.0	35.6	4.0	e
9 Fuji Dri-Chem	263	99.2	0.0	0.8	44.7	3.7	e
10 Spotchem D-Concept	229	99.1	0.9	0.0	44.0	4.9	e
11 Spotchem SP-4430	21	100.0	0.0	0.0	41.9	4.1	e
12 Piccolo	60	98.3	0.0	1.7	36.0	3.5	e
13 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	37.5	3.2	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


Fosfatasi alcalina

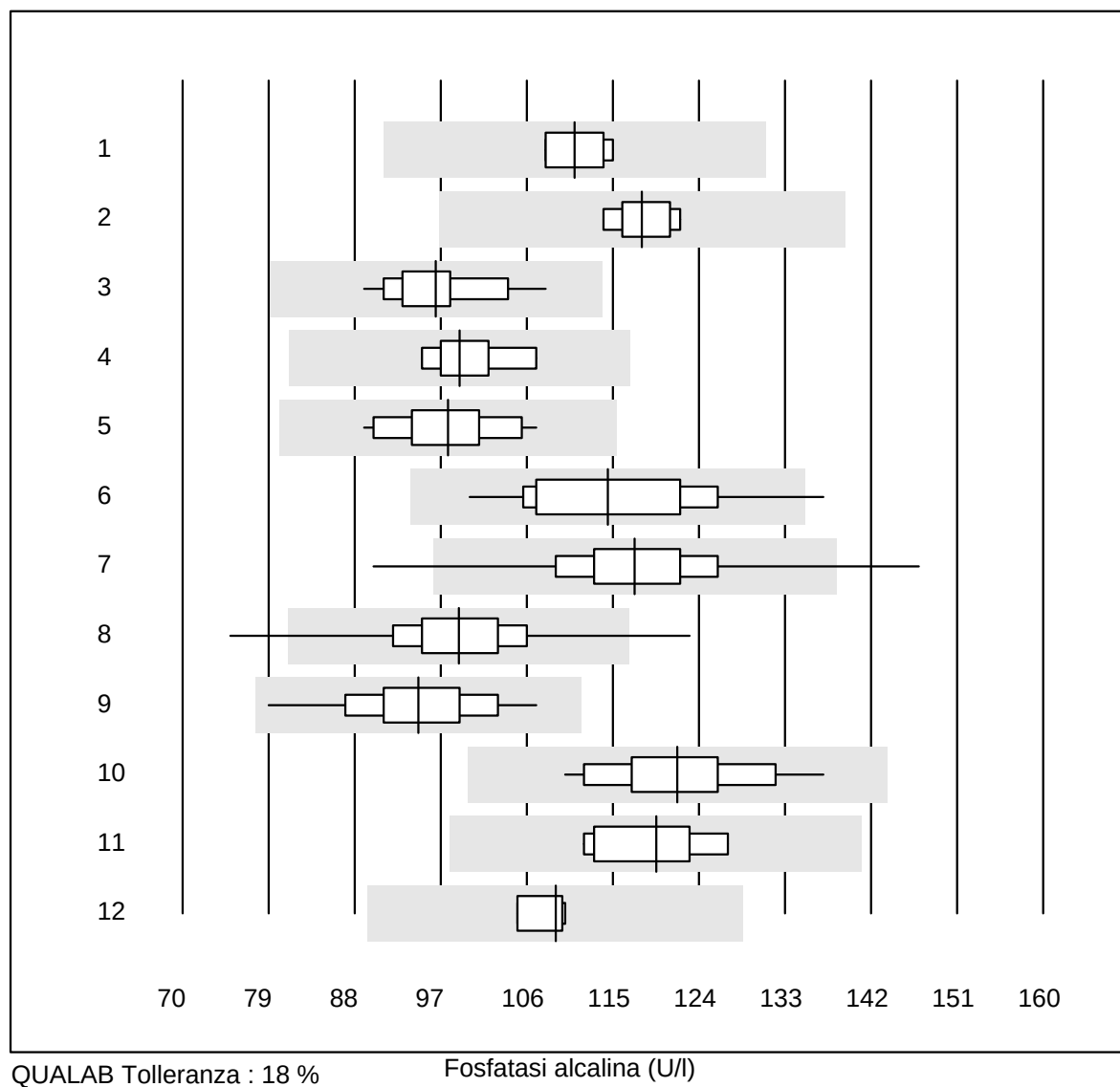

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	111	2.6	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	118	2.8	e
3 Roche	36	100.0	0.0	0.0	96	4.9	e
4 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	99	4.0	e
5 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	98	5.7	e
6 Selectra Pro	13	92.3	7.7	0.0	115	9.3	e*
7 Fuji Dri-Chem	1066	98.9	0.7	0.4	117	5.9	e
8 Spotchem D-Concept	551	97.8	1.1	1.1	99	5.9	e
9 Spotchem SP-4430	77	100.0	0.0	0.0	95	6.2	e
10 Piccolo	47	100.0	0.0	0.0	122	5.6	e
11 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	120	4.8	e
12 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	109	2.3	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Amilasi

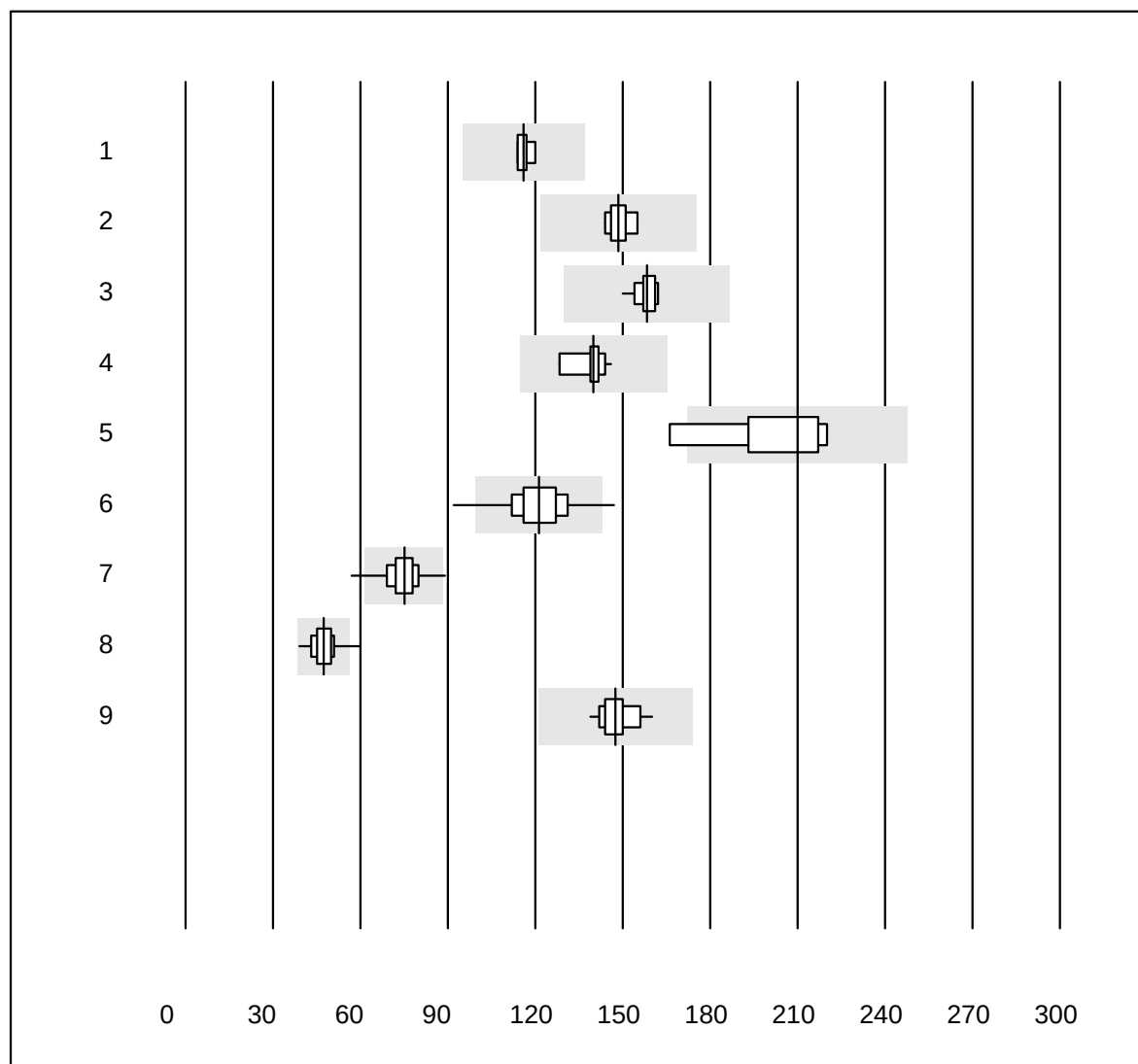


QUALAB Tolleranza : 18 %
(< 50: +/- 9 U/l)

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	116	2.3	e
2 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	149	2.5	e
3 Roche	15	100.0	0.0	0.0	158	2.0	e
4 Autolyser	10	100.0	0.0	0.0	140	3.3	e
5 Selectra Pro	8	87.5	12.5	0.0	210	9.1	e*
6 Fuji Dri-Chem	752	98.6	1.3	0.1	121	6.3	e
7 Spotchem D-Concept	385	98.2	1.0	0.8	75	5.8	e
8 Spotchem SP-4430	53	75.5	1.9	22.6	47	8.8	e
9 Piccolo	54	100.0	0.0	0.0	147	3.5	e


8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Amilasi pancreatica

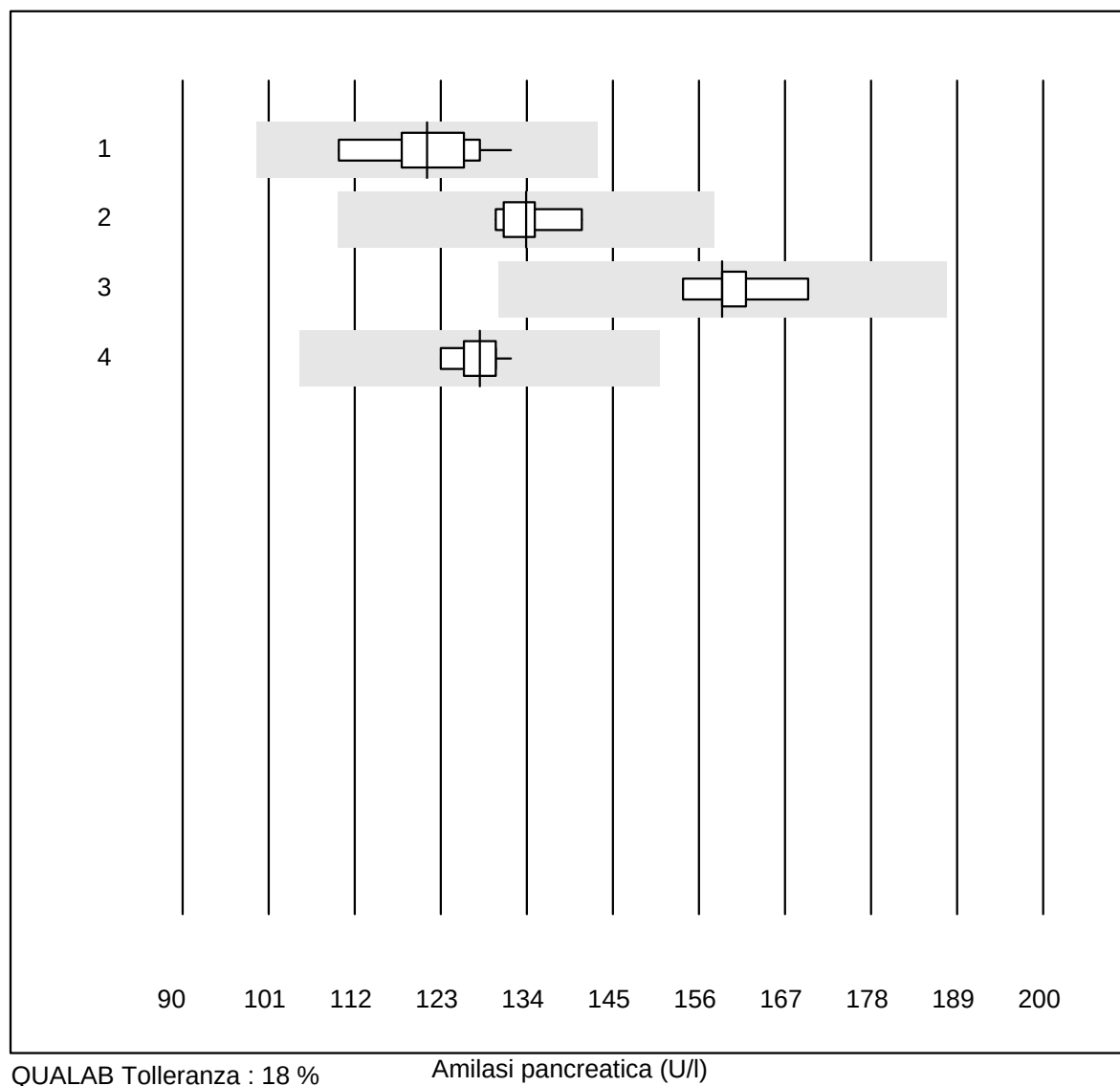

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	121	5.4	e
2	Roche	18	100.0	0.0	0.0	134	2.7	e
3	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	159	3.7	e
4	Autolyser	10	100.0	0.0	0.0	128	2.0	e


Bilirubina totale

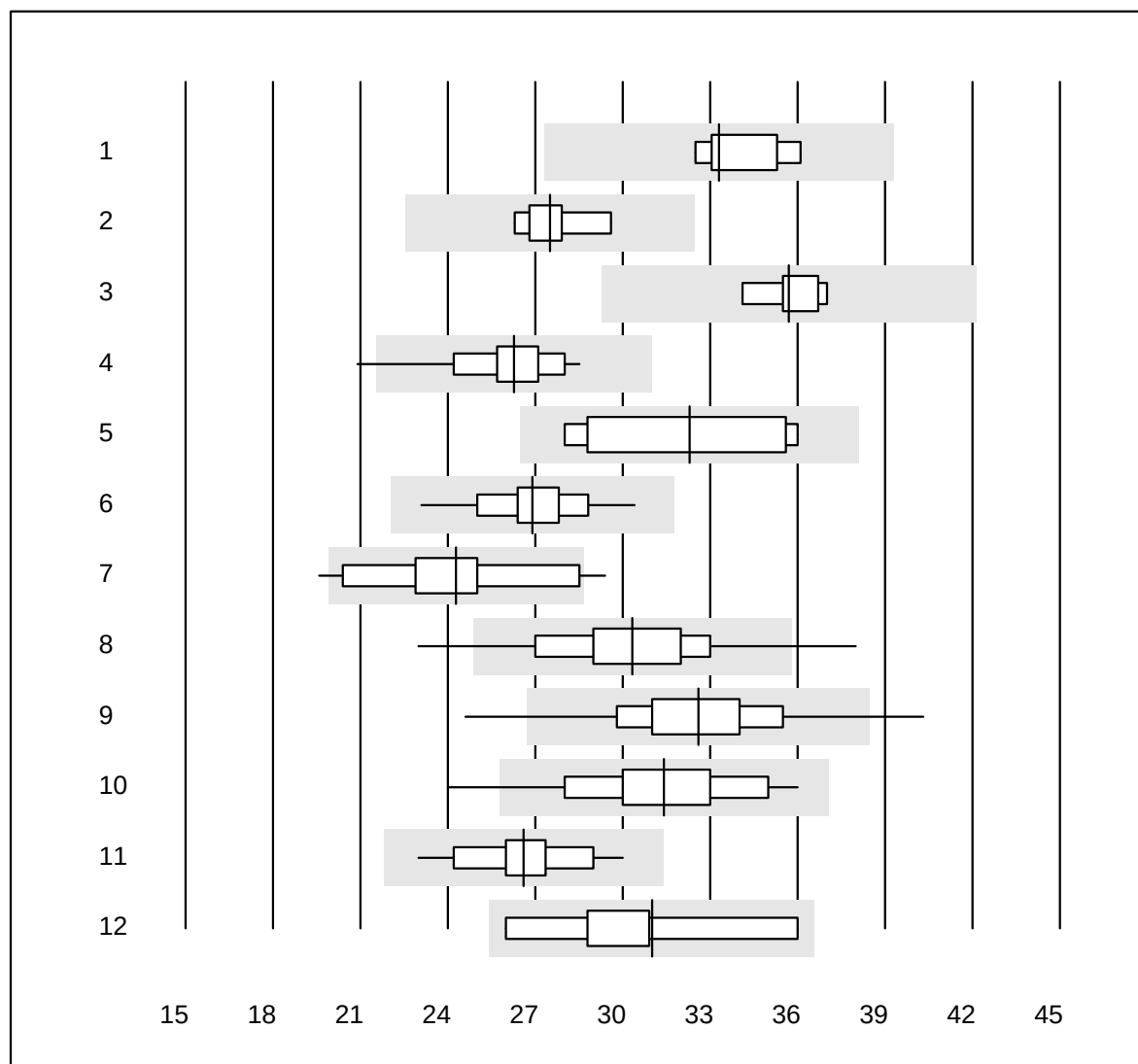

QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina totale (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	33.3	4.6	e
2 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	27.5	3.7	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	35.7	3.2	e
4 Roche	36	97.2	2.8	0.0	26.3	5.7	e
5 Siemens	8	87.5	0.0	12.5	32.3	10.1	e*
6 Autolyser	19	100.0	0.0	0.0	26.9	5.9	e
7 Selectra Pro	14	85.7	14.3	0.0	24.3	11.2	e*
8 Fuji Dri-Chem	883	96.0	2.2	1.8	30.3	7.8	e
9 Spotchem D-Concept	433	95.4	2.5	2.1	32.6	7.3	e
10 Spotchem SP-4430	63	96.8	3.2	0.0	31.4	8.2	e
11 Piccolo	54	88.9	0.0	11.1	26.6	5.7	e
12 Skyla	9	100.0	0.0	0.0	31.0	9.3	a

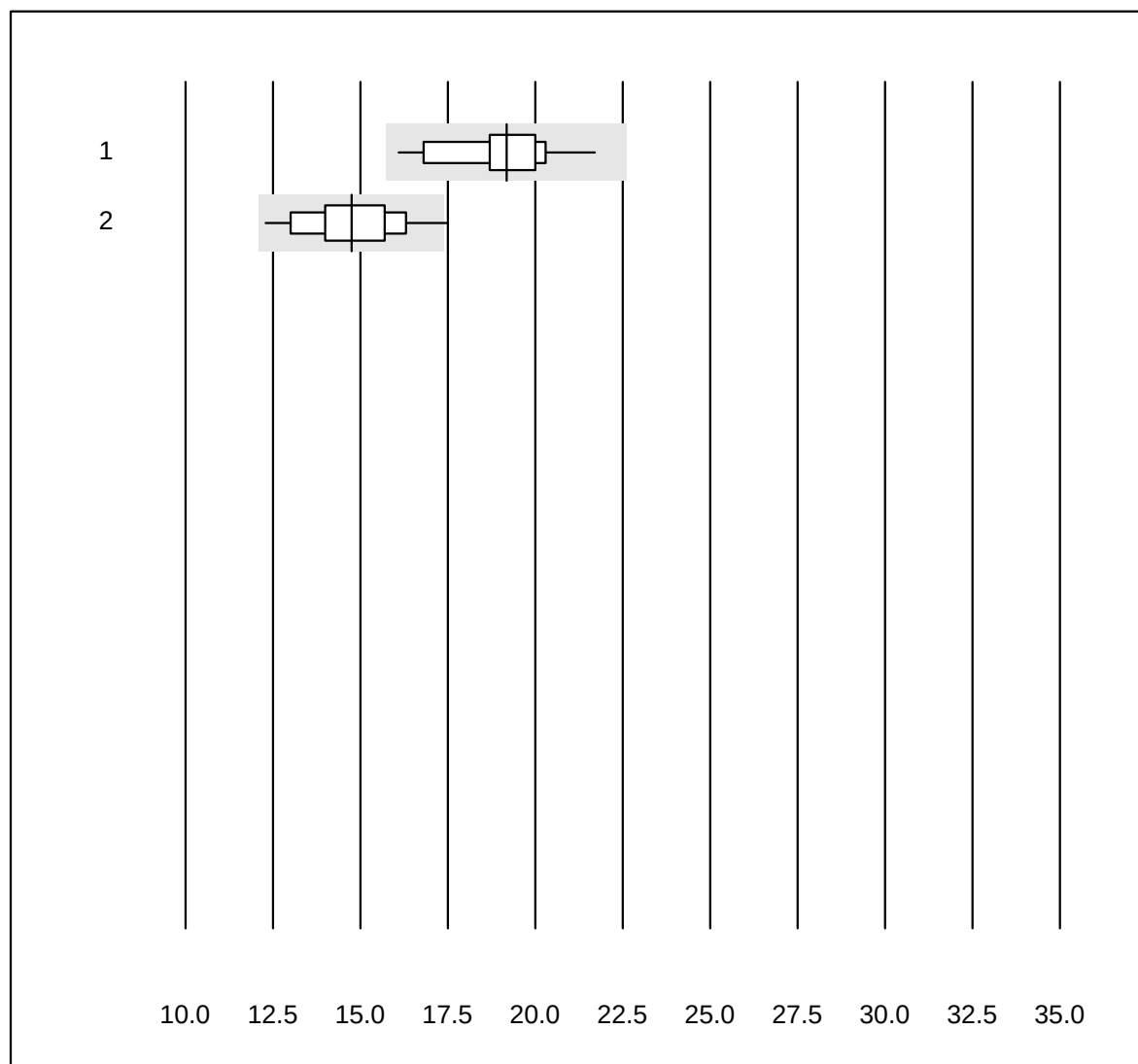Bilirubina diretta


Tolleranza MQ : 18 %

Bilirubina diretta ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	15	100.0	0.0	0.0	19.2	7.5	e
2 Fuji Dri-Chem	22	91.0	4.5	4.5	14.7	9.1	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Calcio

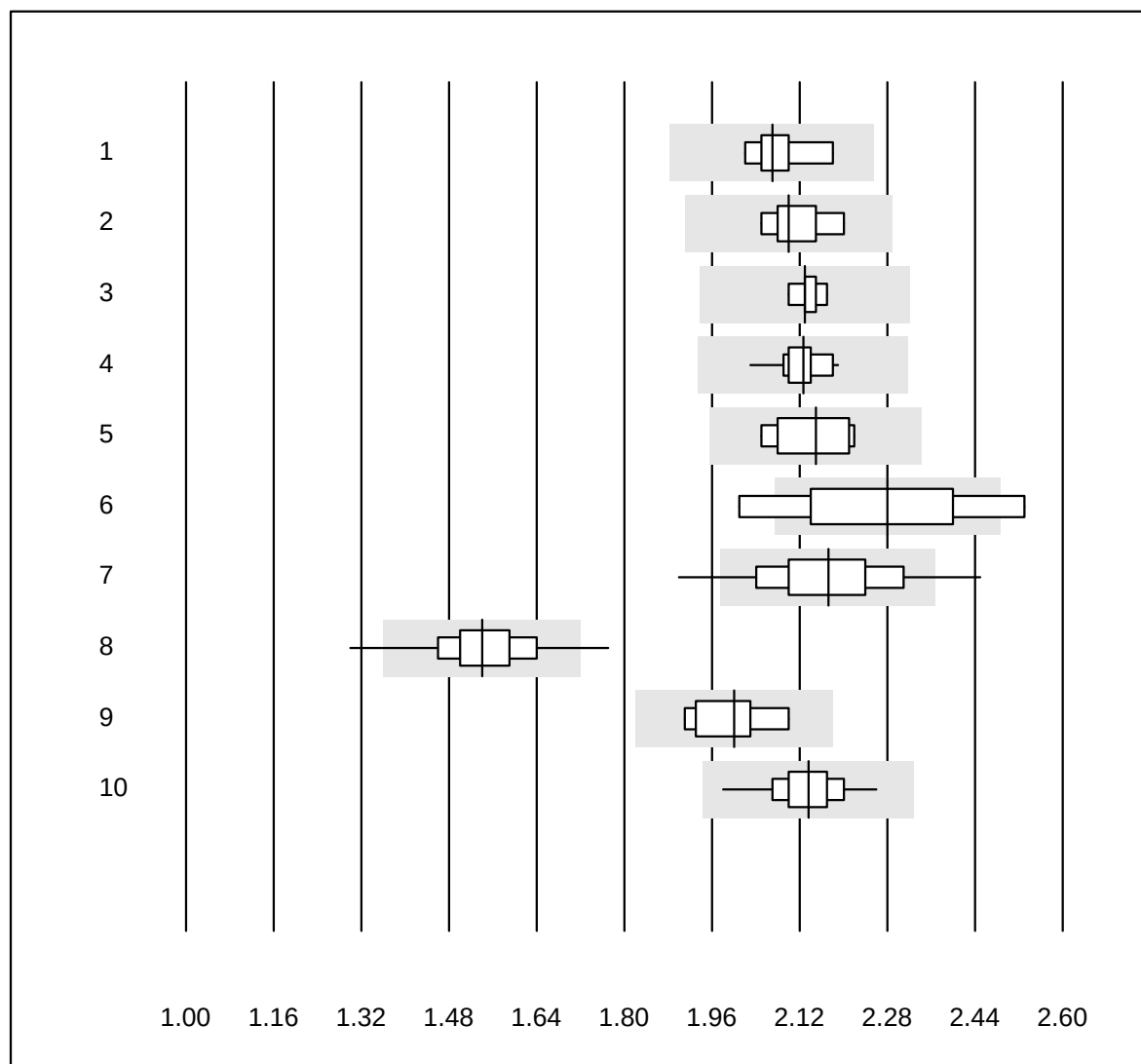


QUALAB Tolleranza : 9 %
(< 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	2.07	2.9	e*
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	2.10	2.4	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	2.13	1.2	e
4 Roche	38	100.0	0.0	0.0	2.13	1.7	e
5 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	2.15	3.0	e*
6 Autolyser	8	75.0	25.0	0.0	2.28	7.4	e*
7 Fuji Dri-Chem	255	92.5	6.3	1.2	2.17	4.8	e
8 Spotchem D-Concept	68	95.6	2.9	1.5	1.54	4.9	e
9 Spotchem SP-4430	9	100.0	0.0	0.0	2.00	3.1	e
10 Piccolo	46	100.0	0.0	0.0	2.14	2.5	e


7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Calcio ISE

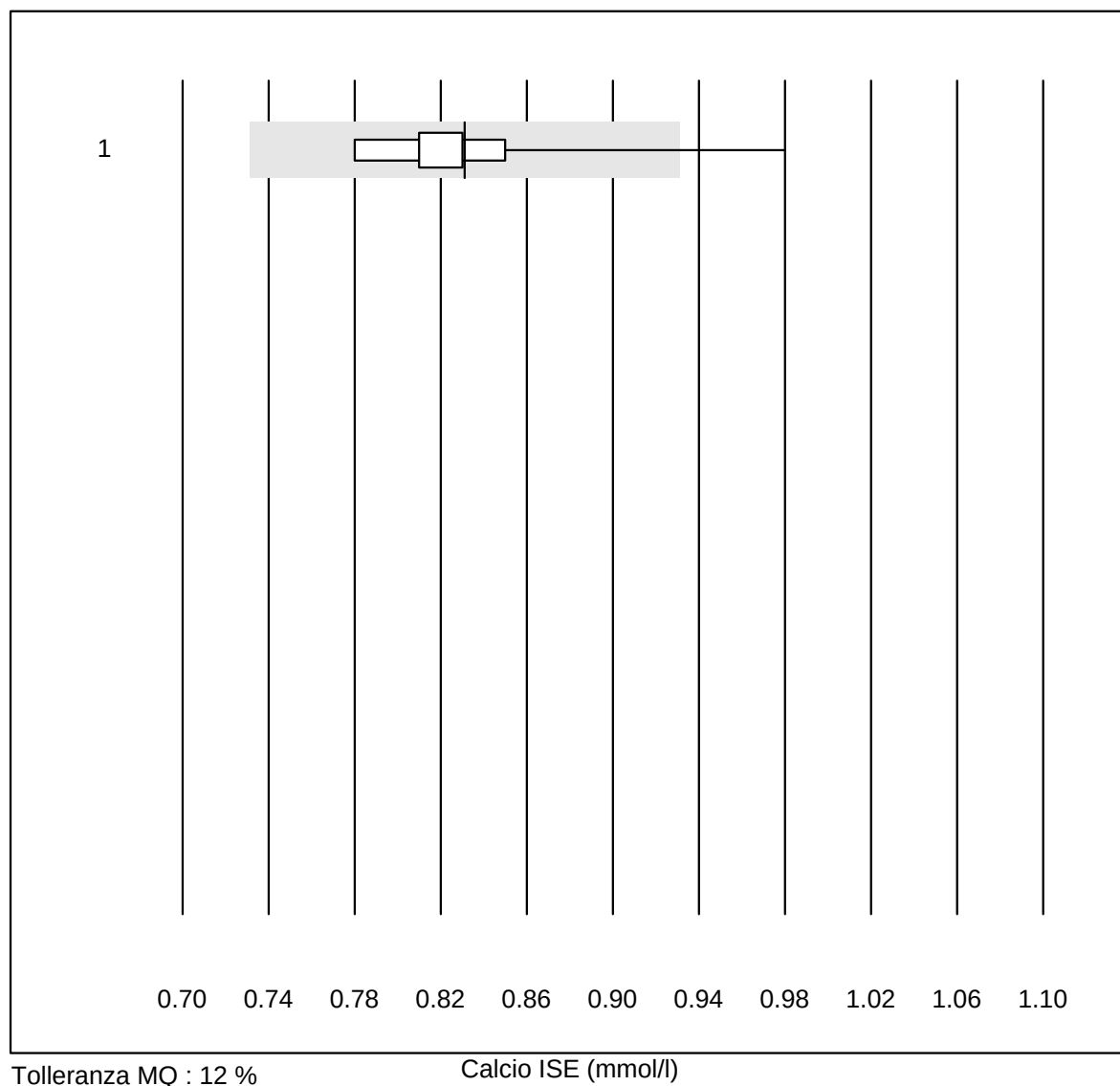

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	11	81.8	9.1	9.1	0.83	6.7	e*
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Cloruri

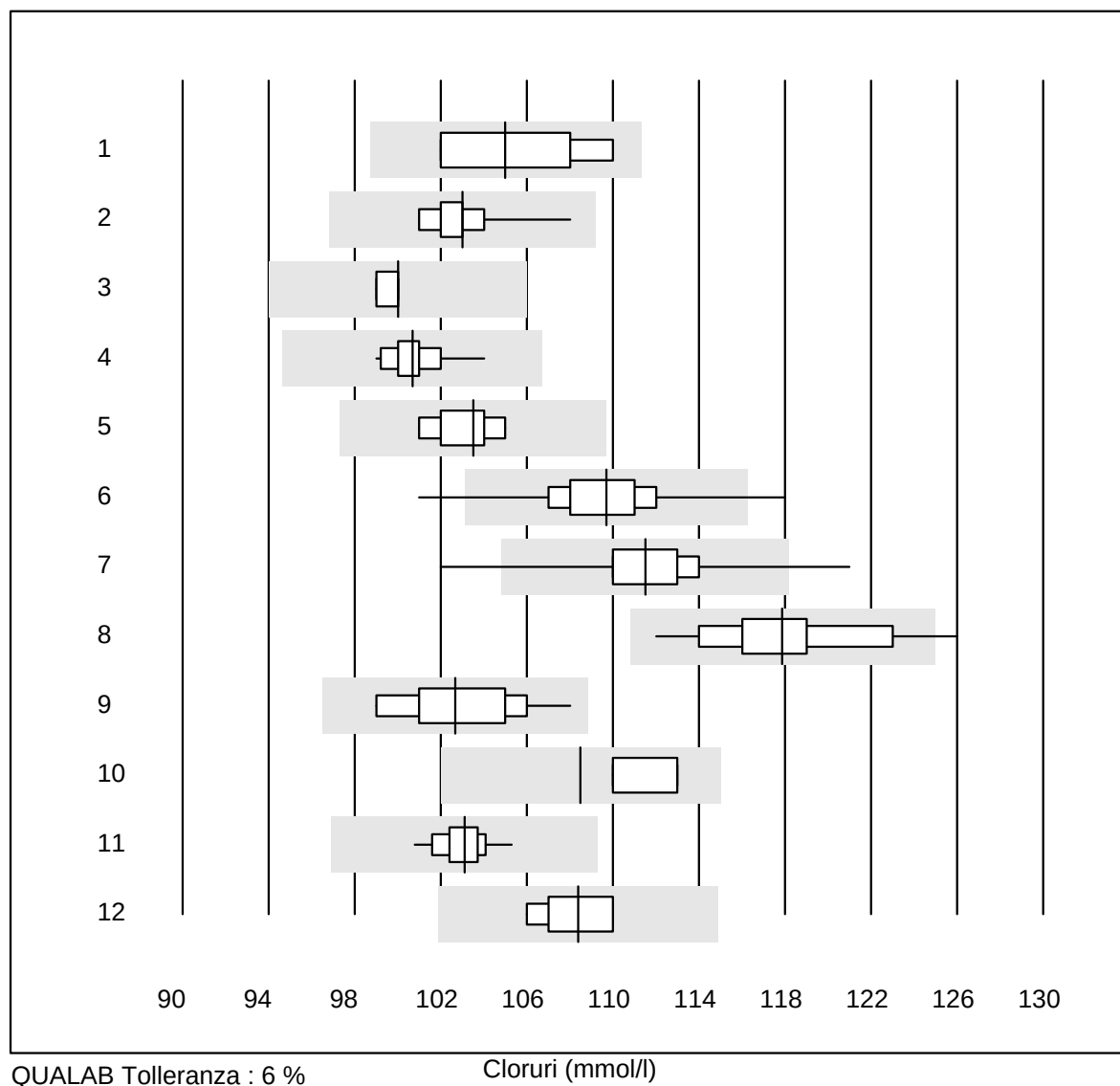

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	105	3.9	e*
2 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	103	1.9	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	100	0.5	e
4 Roche	27	100.0	0.0	0.0	101	1.0	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	104	1.3	e
6 Fuji Dri-Chem	982	98.5	0.8	0.7	110	1.9	e
7 Spotchem D-Concept	418	97.1	1.0	1.9	112	1.7	e
8 Spotchem EL-SE 1520	54	96.3	3.7	0.0	118	2.6	e
9 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	103	2.7	e
10 Skyla	4	50.0	0.0	50.0	109	1.9	a
11 Exias	33	90.9	0.0	9.1	103	1.0	e
12 iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	108	1.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Colesterolo

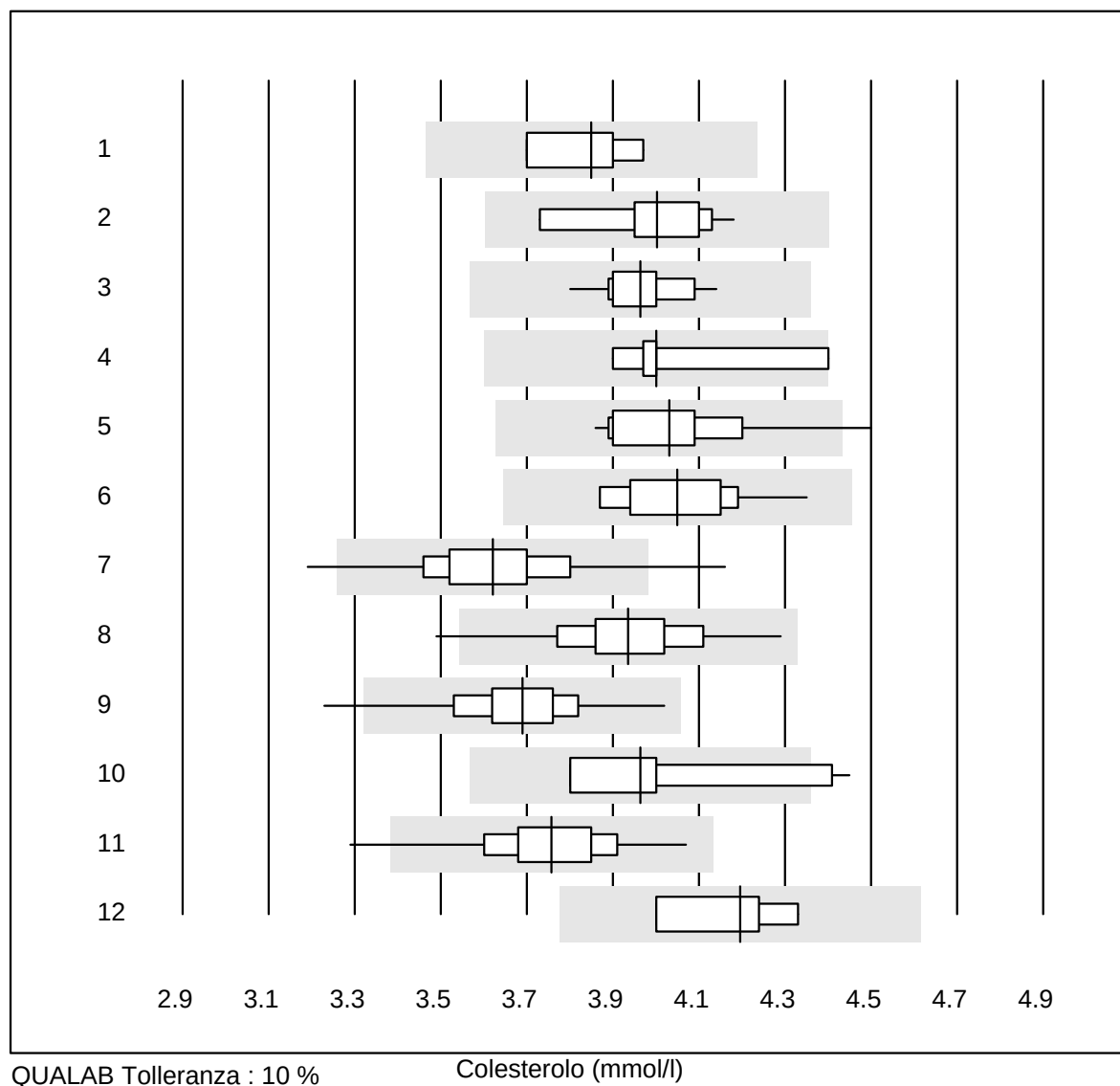


QUALAB Tolleranza : 10 %

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	3.85	3.1	e*
2 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	4.00	3.1	e
3 Roche	31	100.0	0.0	0.0	3.96	2.0	e
4 Siemens	7	85.7	14.3	0.0	4.00	4.0	e*
5 Autolyser	22	95.5	4.5	0.0	4.03	3.8	e
6 Selectra Pro	11	90.9	0.0	9.1	4.05	3.6	e
7 Fuji Dri-Chem	1019	96.8	1.7	1.5	3.62	3.9	e
8 Spotchem D-Concept	467	97.5	0.4	2.1	3.93	3.3	e
9 Spotchem SP-4430	73	98.6	1.4	0.0	3.69	3.5	e
10 Piccolo	23	87.0	13.0	0.0	3.96	5.0	e
11 Cholestech LDX	231	97.8	1.3	0.9	3.76	3.5	e
12 Hitachi S40/M40	4	100.0	0.0	0.0	4.20	3.4	e*
13 altri metodi	5	80.0	20.0	0.0	3.40	5.6	e*

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Colesterolo HDL

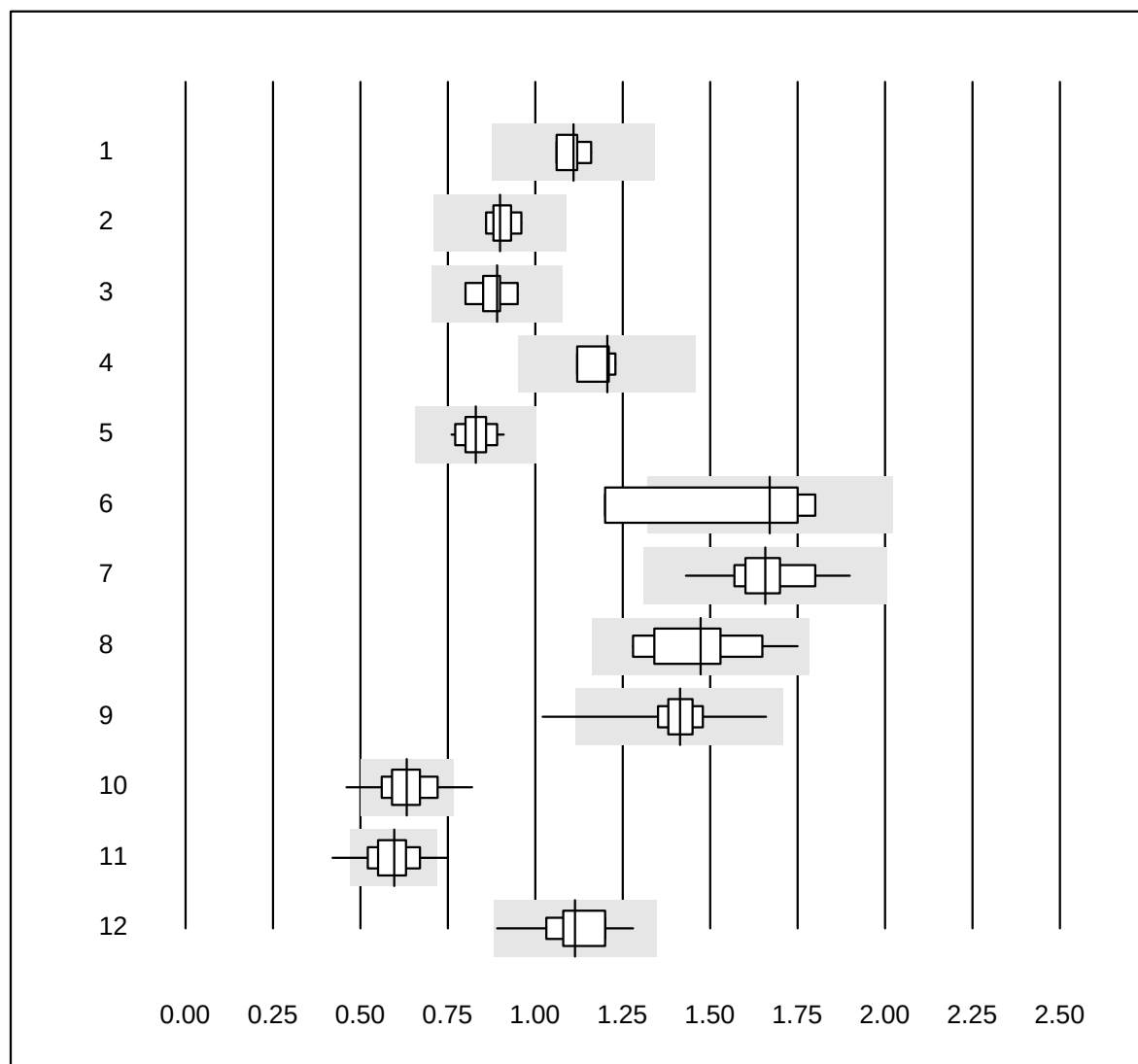


QUALAB Tolleranza : 21 %

Colesterolo HDL (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	1.11	3.8	e
2 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	0.90	4.4	e
3 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	0.89	5.2	e
4 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	1.21	4.1	e
5 Roche	29	100.0	0.0	0.0	0.83	4.9	e
6 Dimension	4	75.0	25.0	0.0	1.67	17.3	a
7 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	1.66	6.4	e
8 Selectra Pro	11	90.9	0.0	9.1	1.47	10.3	e*
9 Fuji Dri-Chem	986	99.2	0.1	0.7	1.41	3.9	e
10 Spotchem D-Concept	455	95.6	2.9	1.5	0.63	9.9	e
11 Spotchem SP-4430	67	97.0	3.0	0.0	0.60	9.6	e
12 Piccolo	22	95.5	0.0	4.5	1.11	7.9	e
13 Cholestech LDX	231	93.5	3.5	3.0	0.94	8.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Creatina chinasi

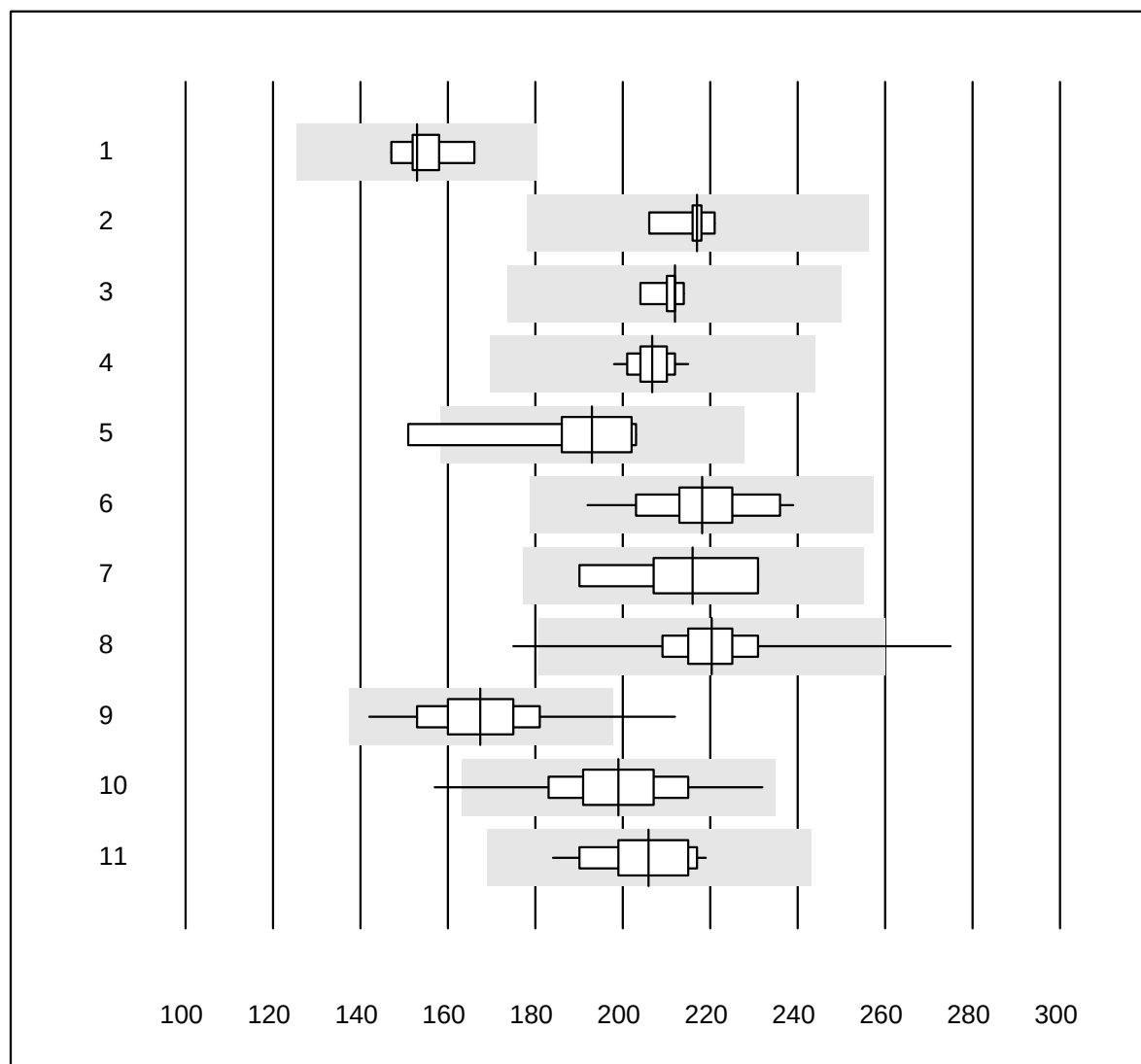


QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	153	4.6	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	217	2.2	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	212	1.8	e
4 Roche	34	100.0	0.0	0.0	207	2.1	e
5 Siemens	7	85.7	14.3	0.0	193	9.4	e*
6 Autolyser	17	100.0	0.0	0.0	218	5.4	e
7 Selectra Pro	6	100.0	0.0	0.0	216	7.7	e*
8 Fuji Dri-Chem	694	97.5	1.9	0.6	220	5.1	e
9 Spotchem D-Concept	316	98.1	0.6	1.3	167	6.6	e
10 Spotchem SP-4430	35	94.2	2.9	2.9	199	7.1	e
11 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	206	5.2	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Colesterolo LDL

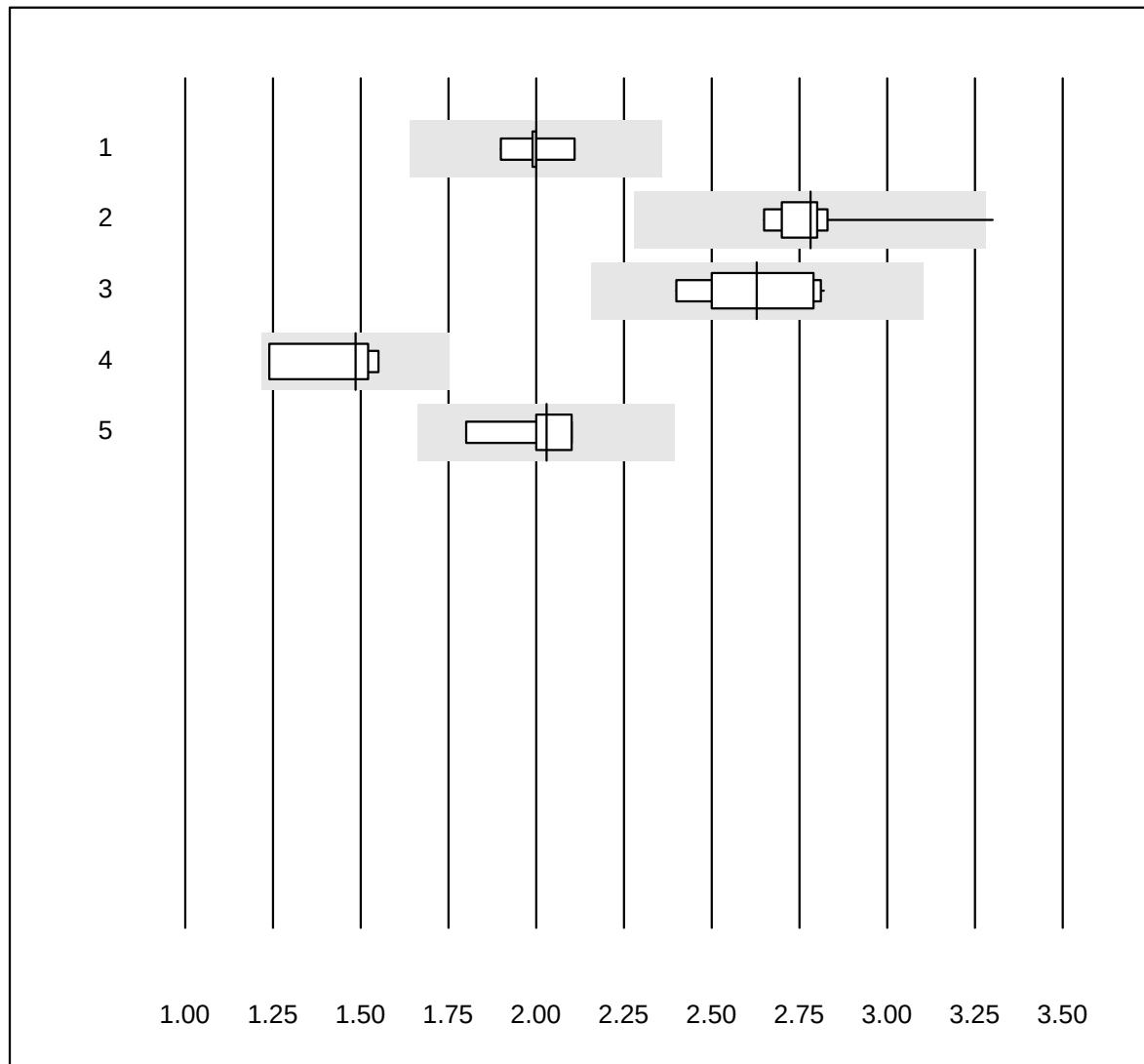


QUALAB Tolleranza : 18 %

Colesterolo LDL (mmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	9	100.0	0.0	0.0	2.0	3.5	e
2	Roche, Cobas	20	95.0	5.0	0.0	2.8	5.0	e
3	Autolyser	10	100.0	0.0	0.0	2.6	6.0	e
4	Selectra	4	100.0	0.0	0.0	1.5	9.7	e*
5	Dimension	5	100.0	0.0	0.0	2.0	6.1	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Ferro

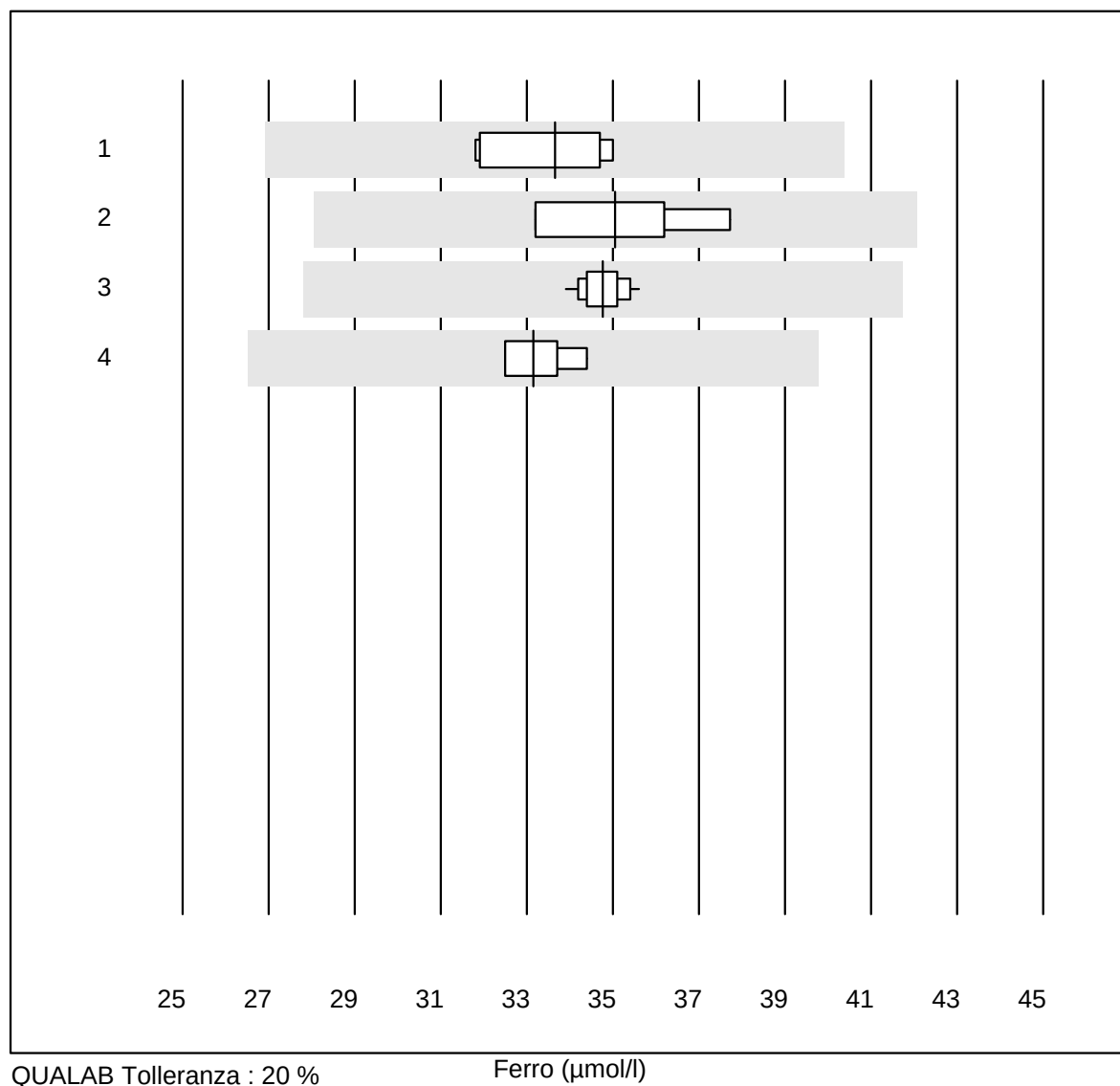

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	34	4.0	e
2	Beckman	4	100.0	0.0	0.0	35	5.9	e*
3	Roche	22	100.0	0.0	0.0	35	1.4	e
4	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	33	2.7	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Gamma-GT

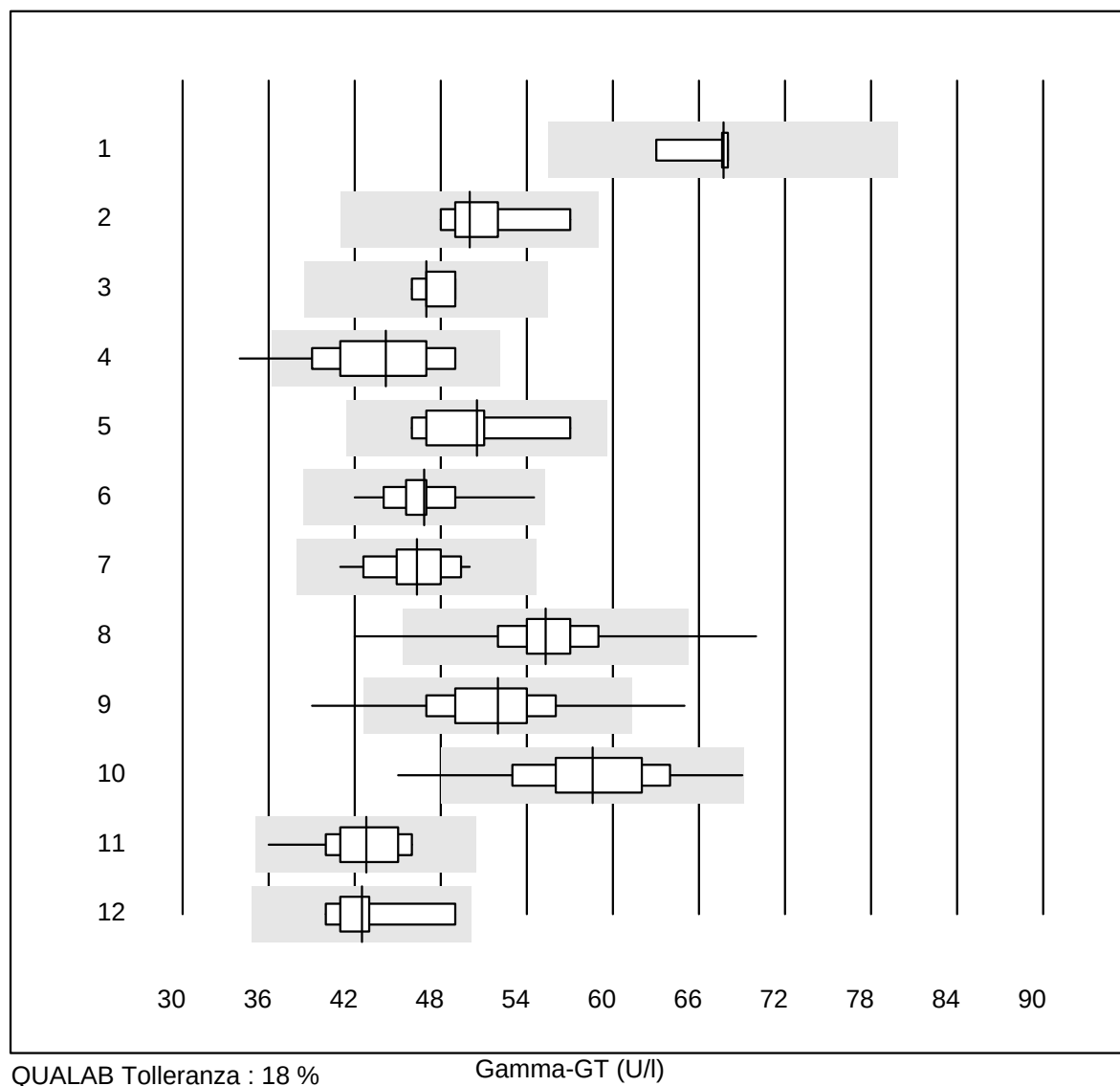


QUALAB Tolleranza : 18 %

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	68	3.2	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	50	6.1	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	47	2.8	e
4 Cobas	37	97.3	2.7	0.0	44	8.9	e
5 Siemens	8	87.5	0.0	12.5	51	7.3	e*
6 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	47	6.0	e
7 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	46	5.8	e
8 Fuji Dri-Chem	1184	99.0	0.3	0.7	55	5.1	e
9 Spotchem D-Concept	616	98.7	1.1	0.2	52	7.1	e
10 Spotchem SP-4430	118	98.3	1.7	0.0	59	7.4	e
11 Piccolo	53	100.0	0.0	0.0	43	5.7	e
12 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	43	7.1	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


Glucosio

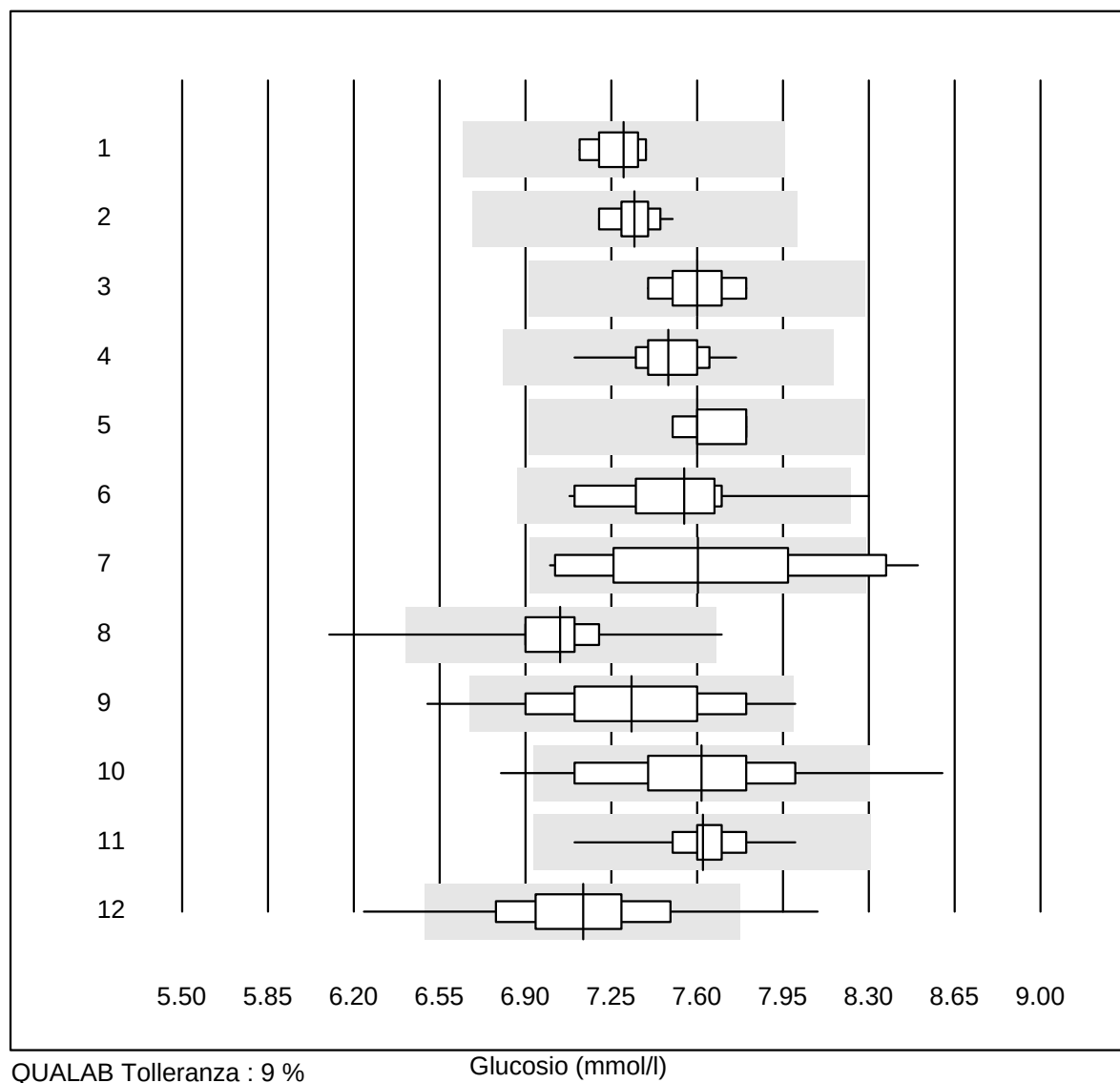

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	7.3	1.5	e
2 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	7.3	1.3	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	7.6	2.1	e
4 Roche	40	97.5	0.0	2.5	7.5	1.8	e
5 Siemens	7	85.7	0.0	14.3	7.6	1.6	e
6 Autolyser	20	95.0	5.0	0.0	7.5	3.7	e
7 Selectra Pro	12	83.3	16.7	0.0	7.6	6.8	e*
8 Fuji Dri-Chem	1120	98.9	0.5	0.6	7.0	2.4	e
9 Spotchem D-Concept	578	96.7	2.8	0.5	7.3	4.4	e
10 Spotchem SP-4430	94	88.3	9.6	2.1	7.6	4.7	e
11 Piccolo	67	100.0	0.0	0.0	7.6	1.7	e
12 Cholestech LDX	228	91.2	3.5	5.3	7.1	4.1	e


Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Glucosio

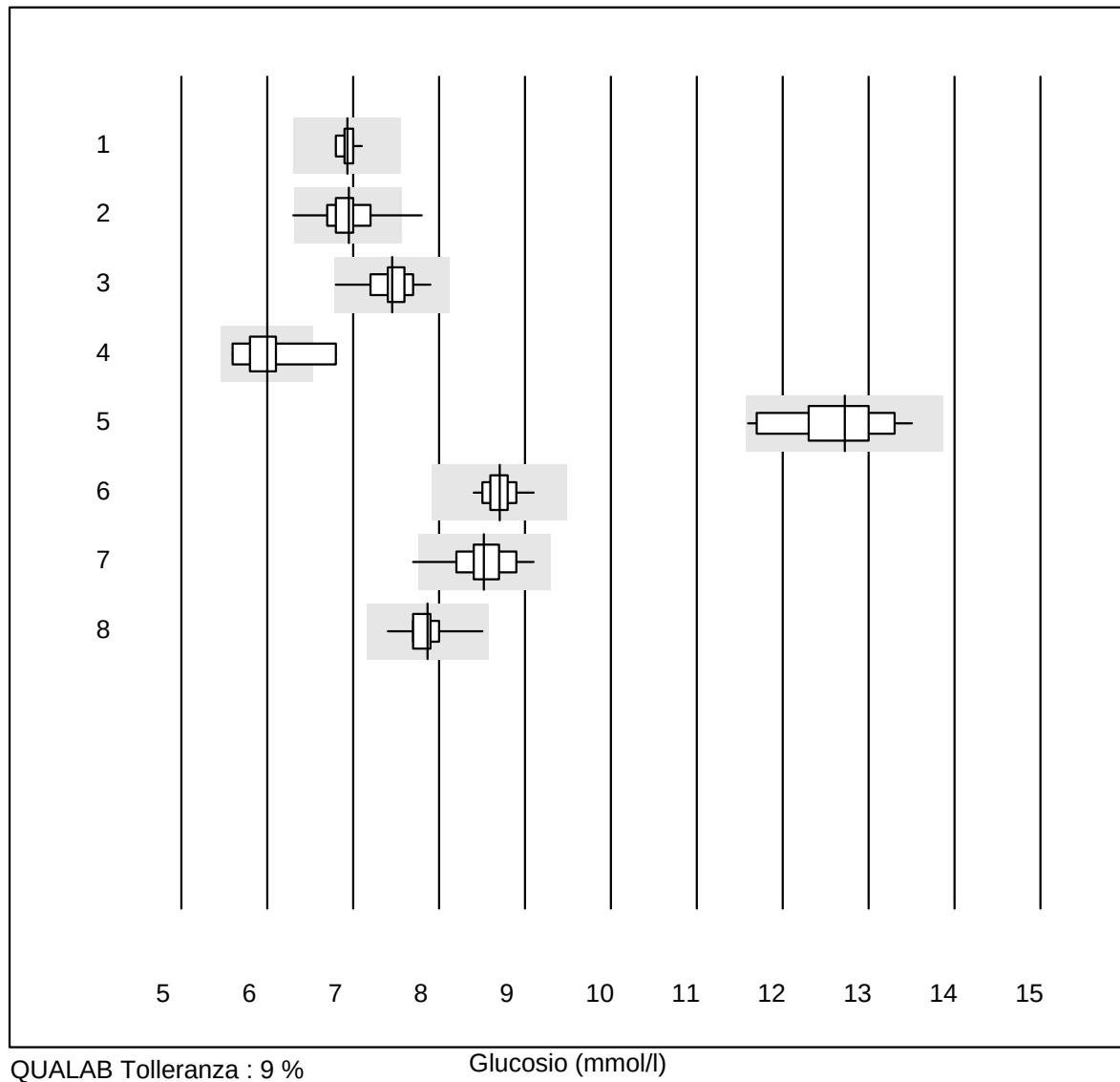

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	6.9	1.4	e
2 Cobas Pulse	277	94.9	2.9	2.2	6.9	3.3	e
3 OneTouch Verio	30	100.0	0.0	0.0	7.5	3.0	e
4 Contour 2 (5s)	7	85.7	14.3	0.0	6.0	6.3	e*
5 Healthpro	23	87.0	0.0	13.0	12.7	4.2	e
6 Mylife UNIO	110	100.0	0.0	0.0	8.7	1.6	e
7 mylife Pura	40	97.5	2.5	0.0	8.5	3.5	e
8 Alpha Check	17	70.6	0.0	29.4	7.9	3.3	e


Glucosio

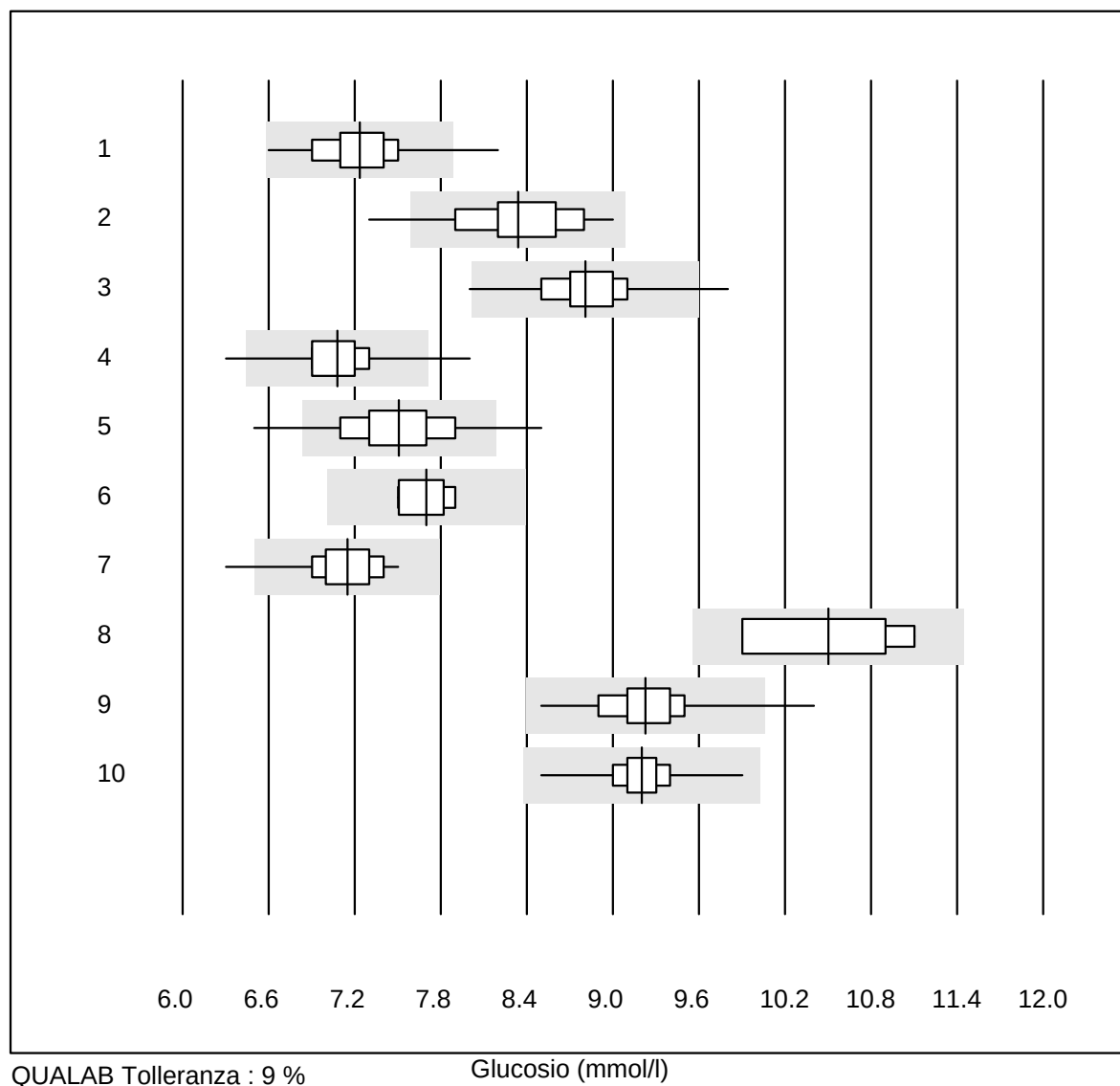

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Accu-Chek Instant	126	95.2	2.4	2.4	7.2	3.5	e
2 Accu-Chek Aviva	100	90.0	4.0	6.0	8.3	4.3	e
3 Accu-Chek Inform 2	931	99.4	0.3	0.3	8.8	2.8	e
4 Accu-Check Guide	359	96.4	2.5	1.1	7.1	3.1	e
5 Contour NEXT/XT	1511	94.6	4.6	0.8	7.5	4.2	e
6 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	7.7	2.0	e
7 Statstrip/Xpress	72	98.6	1.4	0.0	7.2	3.1	e
8 Glucocard	6	66.7	0.0	33.3	10.5	5.4	a
9 Hemocue 201+ P-equiv	150	95.3	0.7	4.0	9.2	2.9	e
10 Hemocue 201RT P-equiv	141	96.5	0.0	3.5	9.2	2.2	e


9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Glucosio

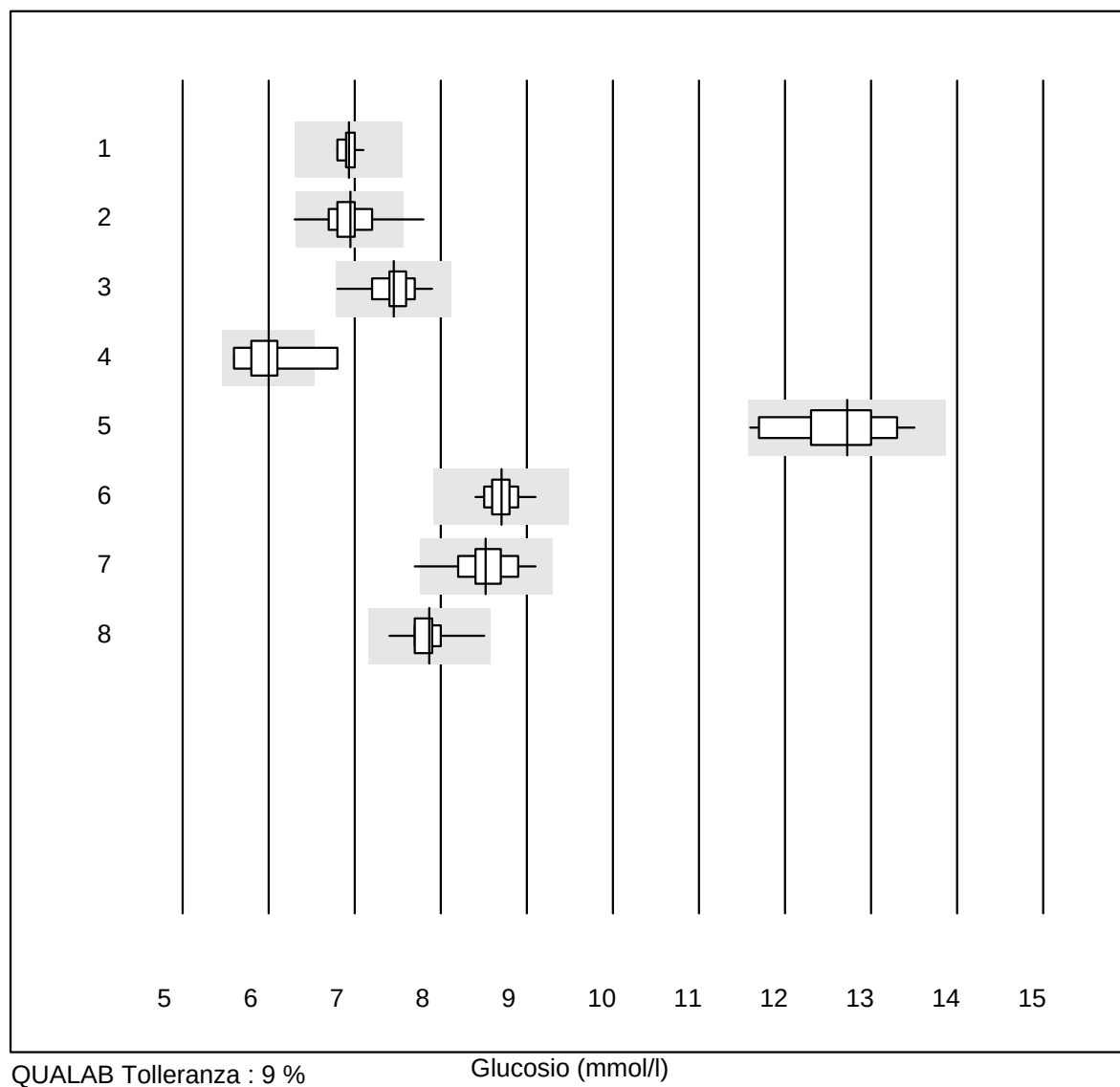

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	6.9	1.4	e
2 Cobas Pulse	277	94.9	2.9	2.2	6.9	3.3	e
3 OneTouch Verio	30	100.0	0.0	0.0	7.5	3.0	e
4 Contour 2 (5s)	7	85.7	14.3	0.0	6.0	6.3	e*
5 Healthpro	23	87.0	0.0	13.0	12.7	4.2	e
6 Mylife UNIO	110	100.0	0.0	0.0	8.7	1.6	e
7 mylife Pura	40	97.5	2.5	0.0	8.5	3.5	e
8 Alpha Check	17	70.6	0.0	29.4	7.9	3.3	e

Acido urico

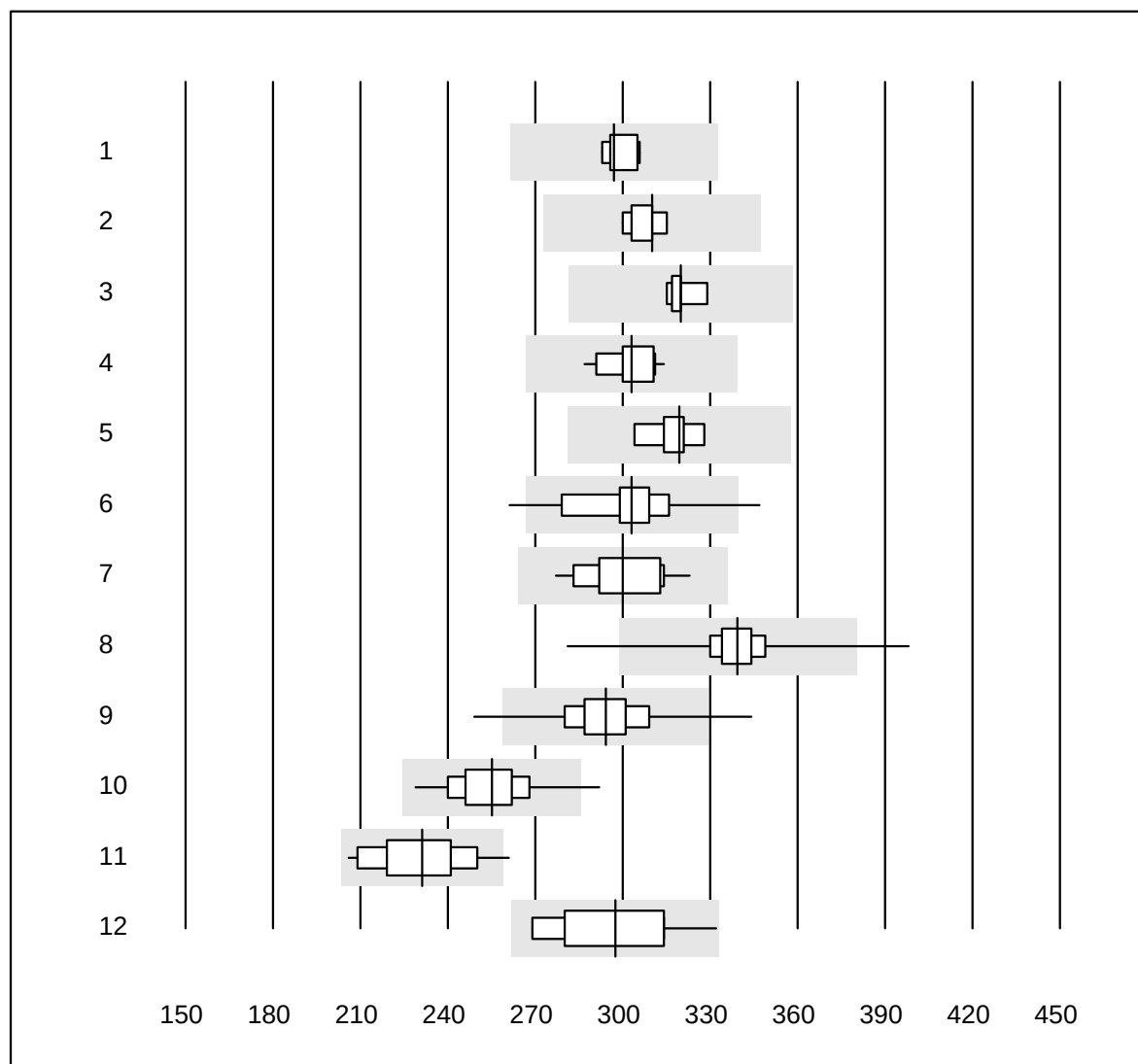


QUALAB Tolleranza : 12 %

Acido urico (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	297	1.9	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	310	1.7	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	320	1.7	e
4 Roche	34	100.0	0.0	0.0	303	2.4	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	320	2.3	e
6 Autolyser	18	88.9	11.1	0.0	303	5.8	e
7 Selectra Pro	13	100.0	0.0	0.0	300	4.5	e
8 Fuji Dri-Chem	1084	98.6	0.8	0.6	339	2.8	e
9 Spotchem D-Concept	579	98.6	0.7	0.7	294	4.1	e
10 Spotchem SP-4430	90	97.8	2.2	0.0	255	4.8	e
11 Piccolo	32	87.5	3.1	9.4	231	6.7	e
12 Skyla	12	91.7	0.0	8.3	297	6.8	e*

Urea

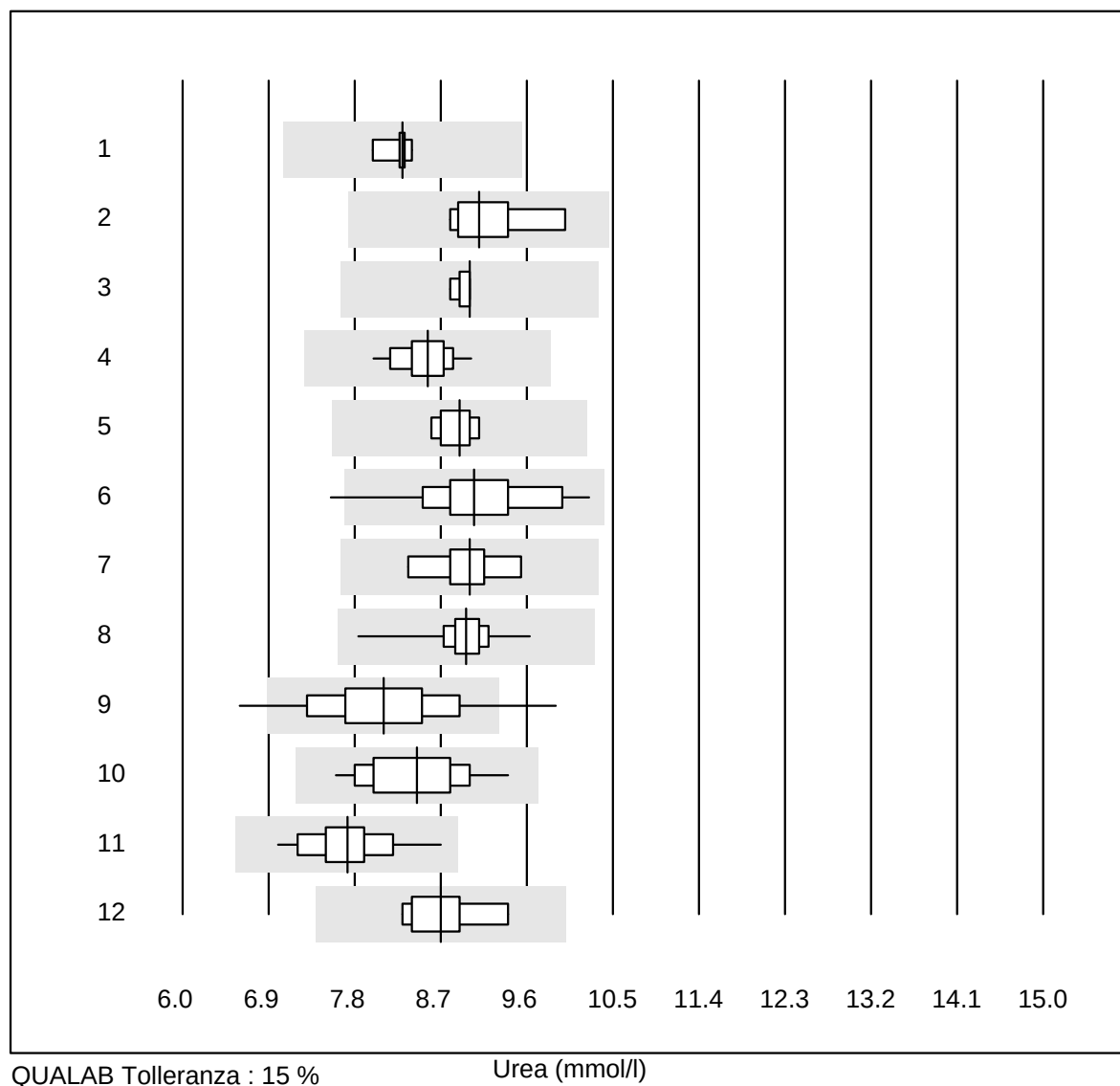


QUALAB Tolleranza : 15 %

Urea (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	8.3	1.9	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	9.1	4.3	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	9.0	1.0	e
4 Roche	35	100.0	0.0	0.0	8.6	3.0	e
5 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	8.9	1.9	e
6 Autolyser	17	94.1	5.9	0.0	9.1	6.9	e
7 Selectra Pro	9	100.0	0.0	0.0	9.0	4.3	e
8 Fuji Dri-Chem	655	99.5	0.0	0.5	9.0	2.3	e
9 Spotchem D-Concept	324	93.5	6.2	0.3	8.1	7.7	e
10 Spotchem SP-4430	44	100.0	0.0	0.0	8.4	5.3	e
11 Piccolo	62	98.4	0.0	1.6	7.7	4.6	e
12 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	8.7	4.2	e
13 iStat Chem8	7	100.0	0.0	0.0	11.9	1.4	e
14 altri metodi	7	71.4	0.0	28.6	8.5	6.8	e*

Potassio

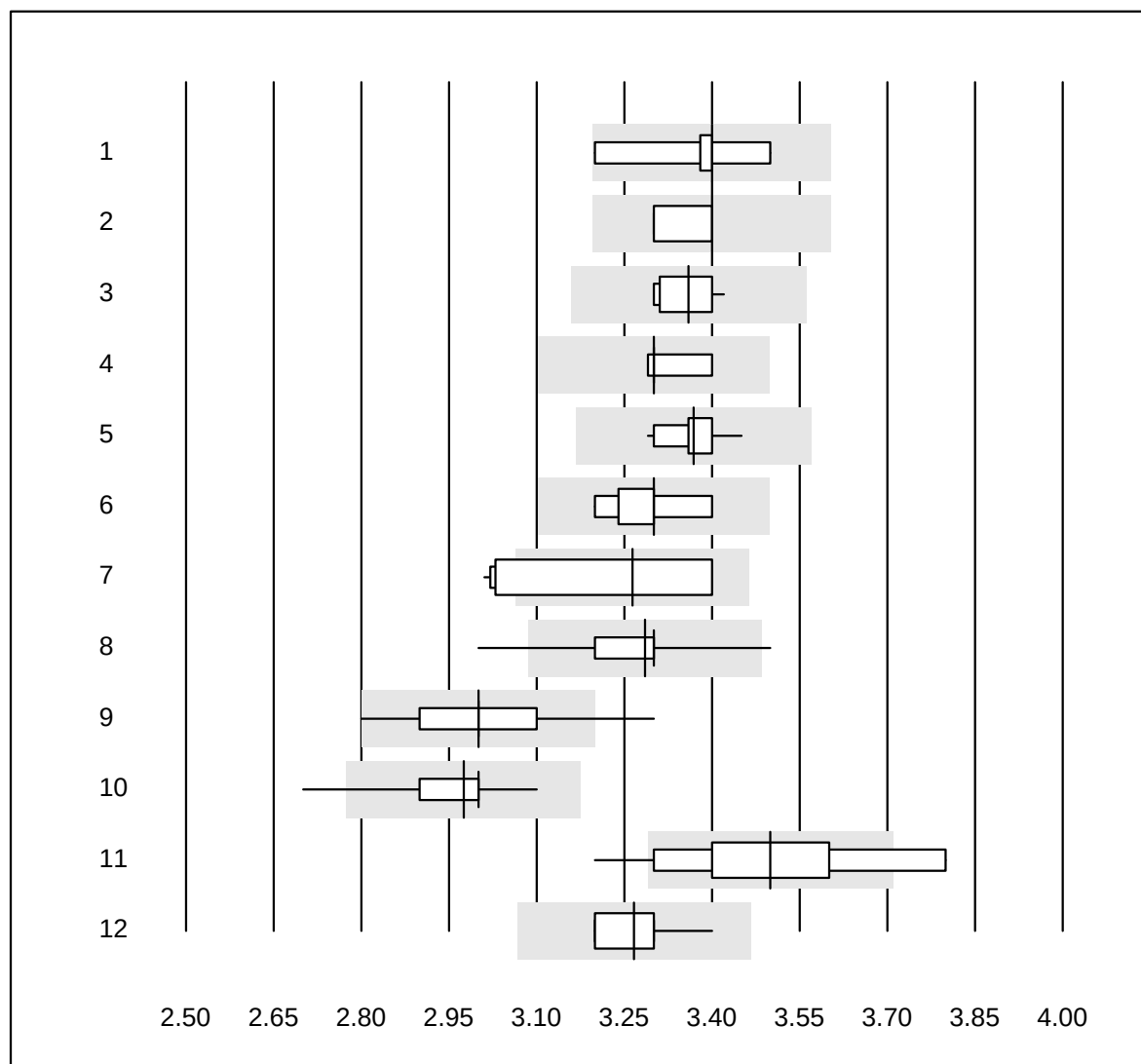


QUALAB Tolleranza : 6 %
(< 3.30: +/- 0.20 mmol/l)

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	3.40	3.2	e*
2 Imuchem / Simplex	4	100.0	0.0	0.0	3.40	1.5	e*
3 Abbott	11	90.9	0.0	9.1	3.36	1.4	e
4 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	3.30	1.4	e
5 Roche	37	100.0	0.0	0.0	3.37	1.3	e
6 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	3.30	1.9	e
7 Autolyser	16	68.7	25.0	6.3	3.26	4.8	e*
8 Fuji Dri-Chem	1143	99.1	0.3	0.6	3.29	1.4	e
9 Spotchem D-Concept	534	96.7	1.1	2.2	3.00	1.8	e
10 Spotchem EL-SE 1520	74	97.2	1.4	1.4	2.98	2.0	e
11 Piccolo	33	57.6	18.2	24.2	3.50	5.3	e*
12 iStat Chem8	13	92.3	0.0	7.7	3.27	2.0	e
13 Exias	39	92.3	0.0	7.7	3.34	1.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Creatinina

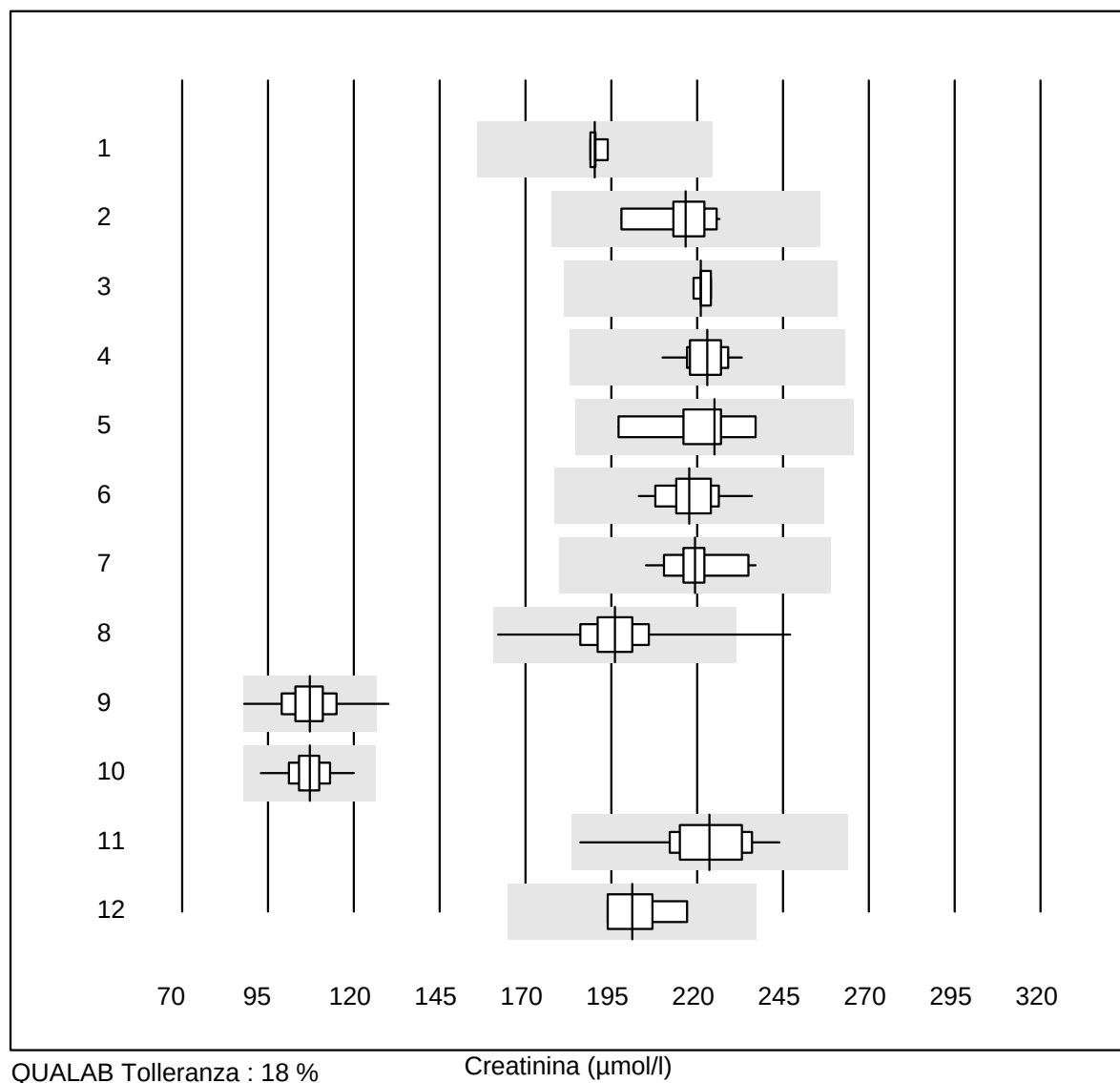


QUALAB Tolleranza : 18 %

Creatinina ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	190	1.1	e
2 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	217	3.8	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	221	1.0	e
4 Roche	36	100.0	0.0	0.0	223	2.5	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	225	5.3	e
6 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	218	3.7	e
7 Selectra Pro	13	100.0	0.0	0.0	219	4.1	e
8 Fuji Dri-Chem	1216	99.5	0.2	0.3	196	4.1	e
9 Spotchem D-Concept	632	98.1	0.2	1.7	107	5.7	e
10 Spotchem SP-4430	134	100.0	0.0	0.0	107	4.4	e
11 Piccolo	64	100.0	0.0	0.0	224	4.8	e
12 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	201	4.8	e
13 EPOC	12	91.7	0.0	8.3	241	10.3	e*

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


Creatinina E

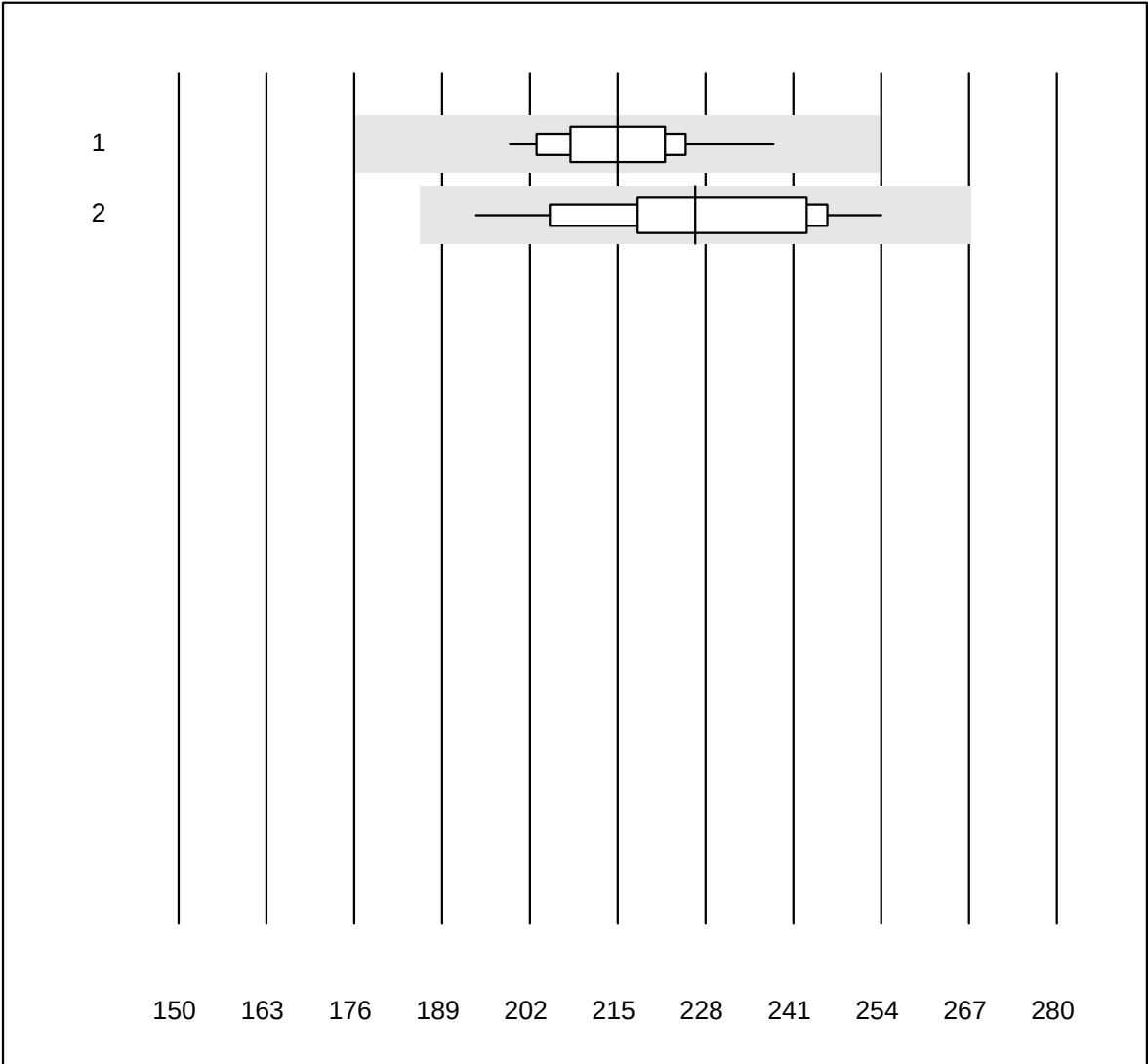

QUALAB Tolleranza : 18 %


Creatinina E (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat Chem8	43	100.0	0.0	0.0	215	4.3	e
2 ABL700/800	15	93.3	0.0	6.7	226	7.8	e

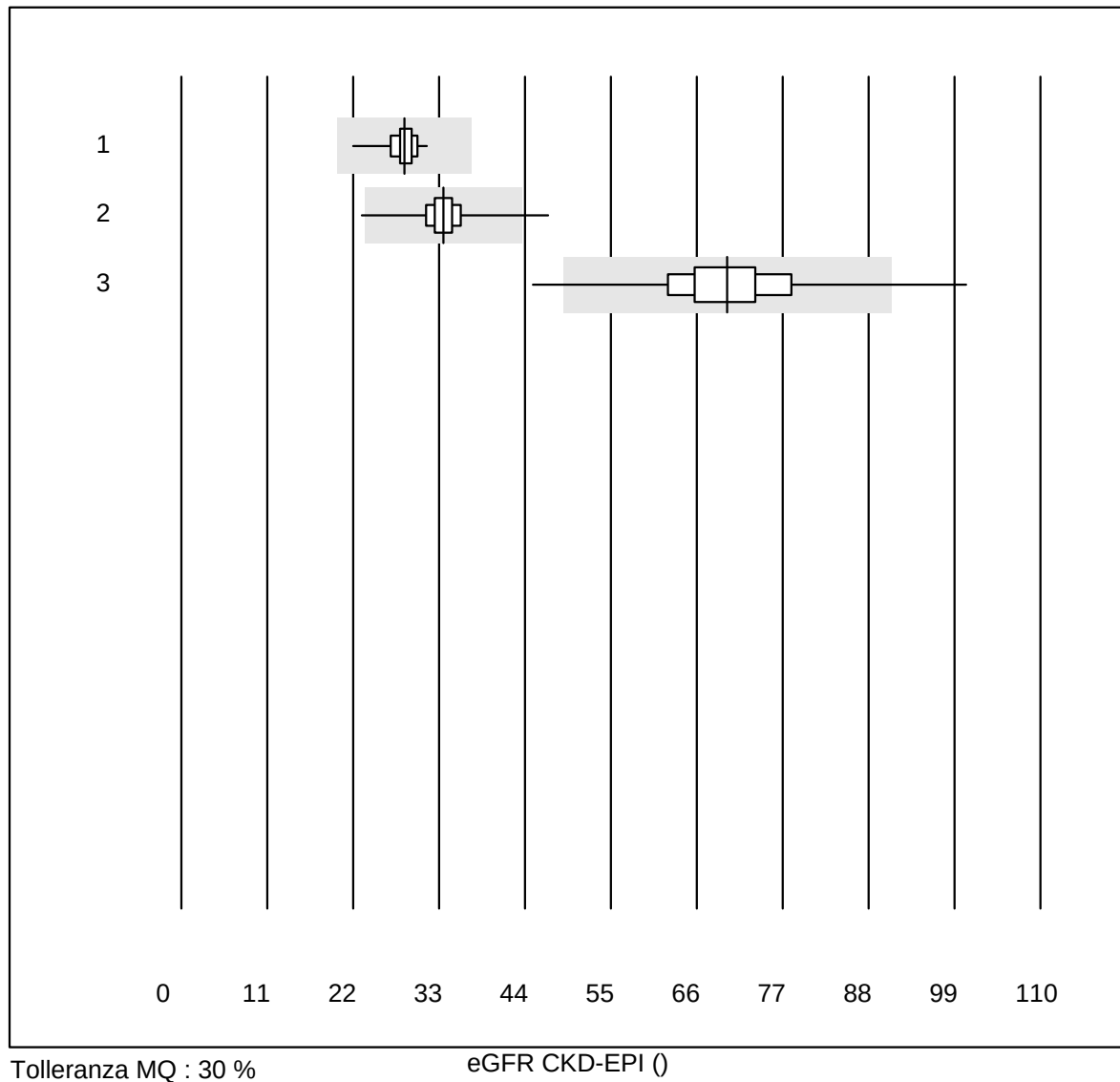eGFR CKD-EPI

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Chimica umida	50	100.0	0.0	0.0	29	5.5	e
2	Fuji Dri-Chem	414	96.1	1.0	2.9	34	7.4	e
3	Spotchem	258	93.8	2.7	3.5	70	10.7	e

eGFR Cockcroft-Gault

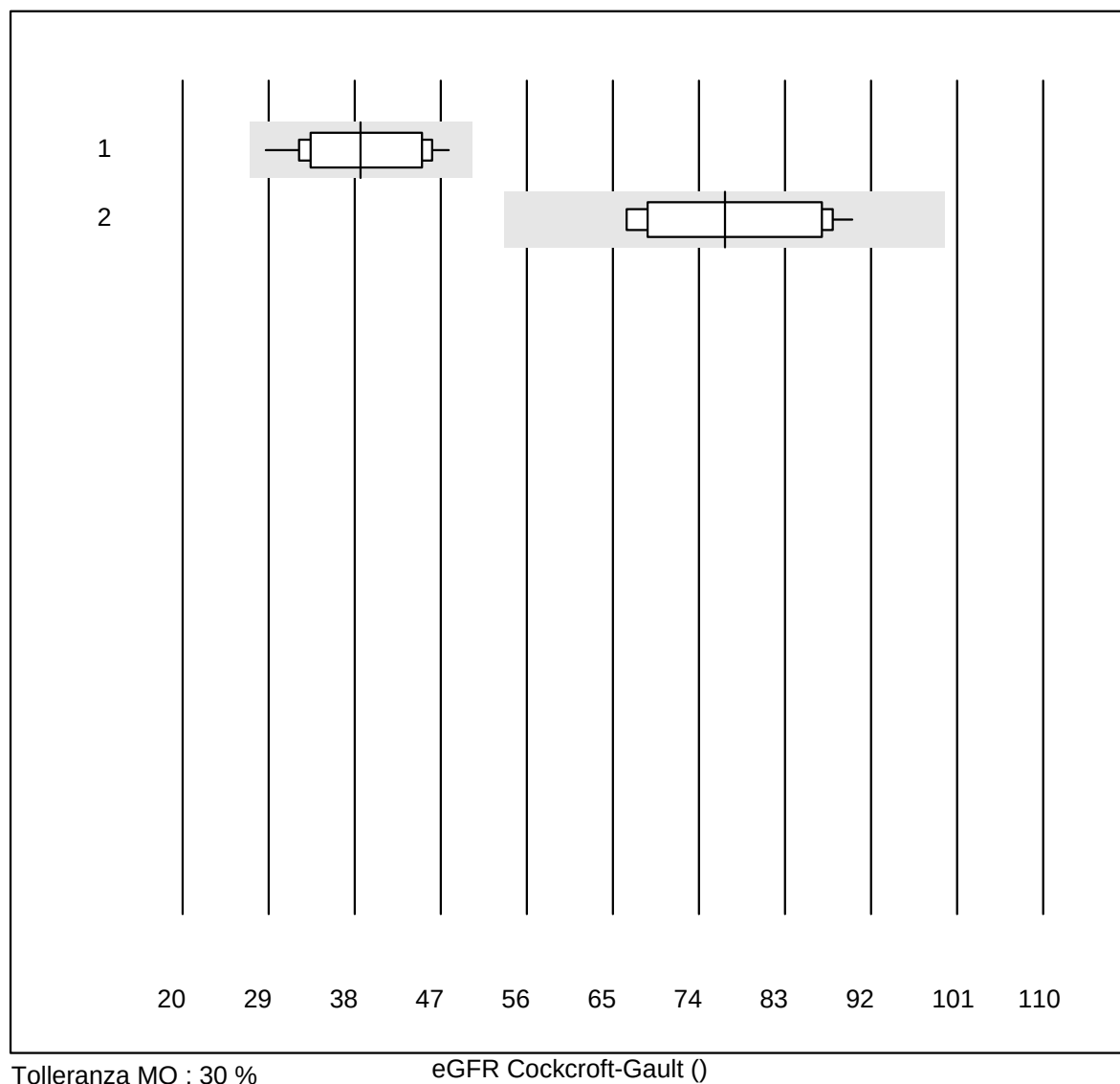


Tolleranza MQ : 30 %

eGFR Cockcroft-Gault ()

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Fuji Dri-Chem	39	97.4	0.0	2.6	39	15.3	e
2	Spotchem	10	100.0	0.0	0.0	77	11.7	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

eGFR MDRD

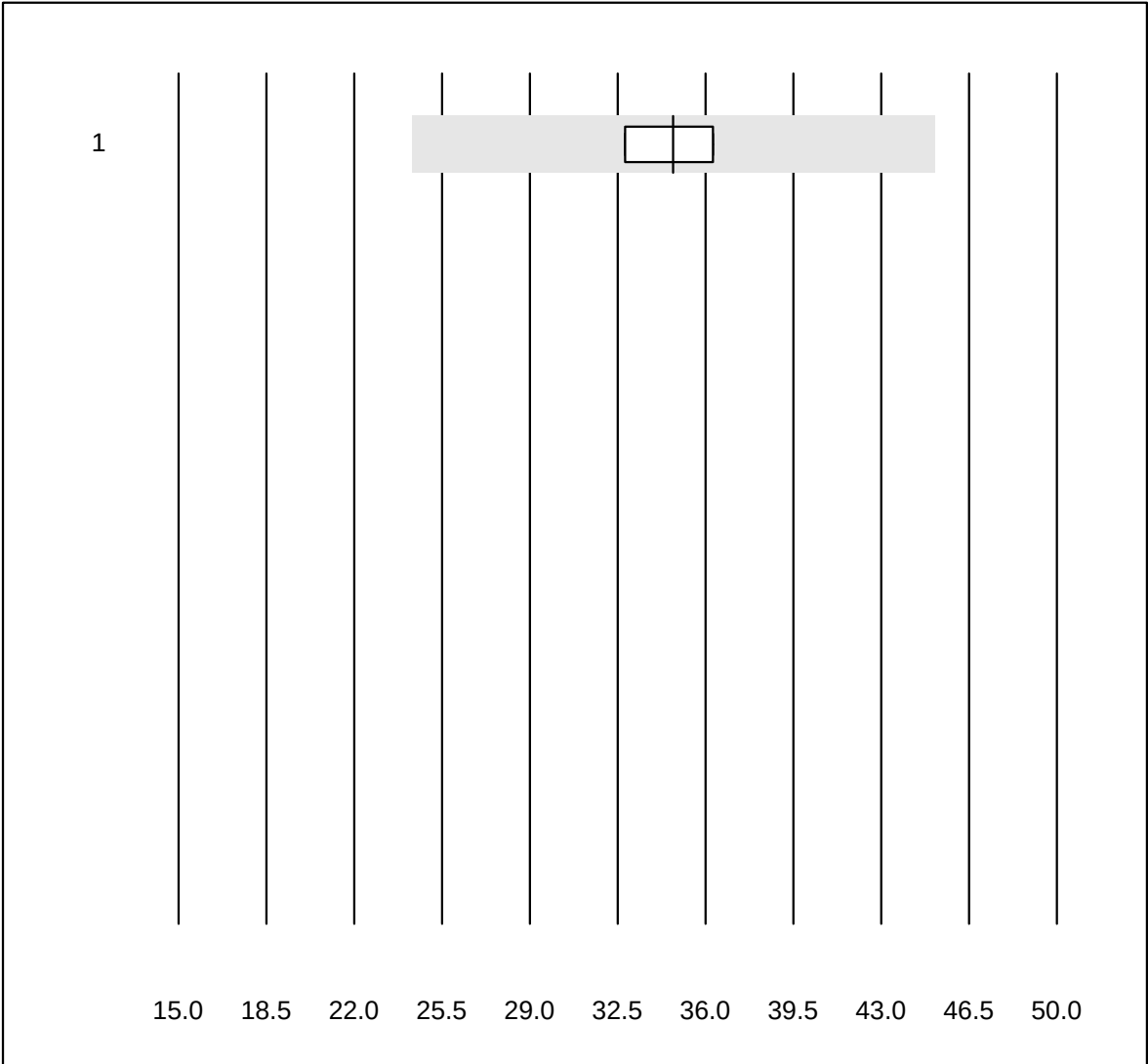


Tolleranza MQ : 30 %

eGFR MDRD ()

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	5	60.0	0.0	40.0	35	5.1	e
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


LDH

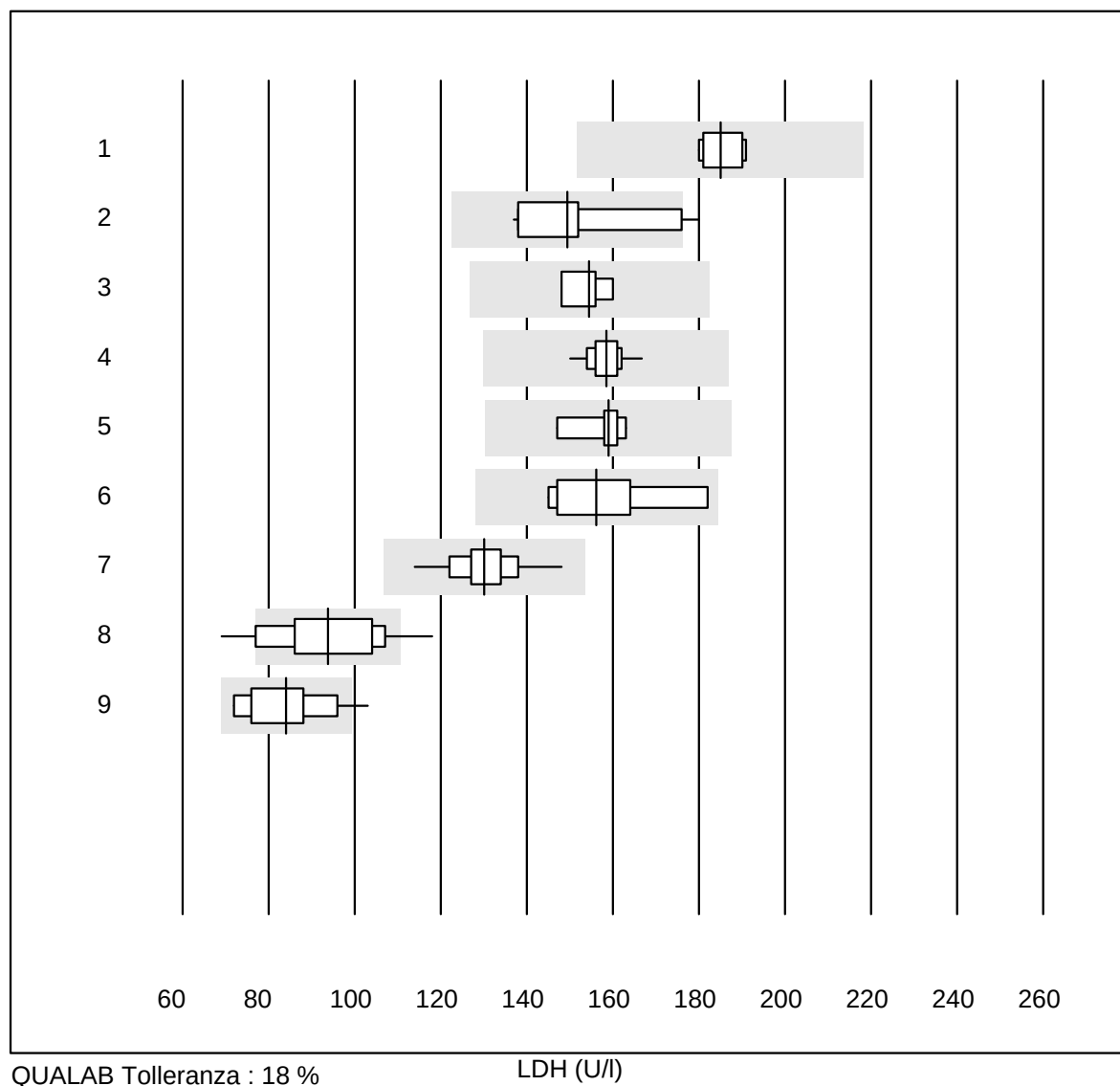

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	185	2.7	e
2 Abbott	11	90.9	9.1	0.0	149	10.0	e*
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	155	3.3	e
4 Roche	35	100.0	0.0	0.0	158	2.2	e
5 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	159	3.6	e
6 Autolyser	8	100.0	0.0	0.0	156	8.0	e*
7 Fuji Dri-Chem	108	99.1	0.0	0.9	130	4.8	e
8 Spotchem D-Concept	40	75.0	12.5	12.5	94	12.9	e
9 Spotchem SP-4430	10	90.0	10.0	0.0	84	11.3	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Magnesio

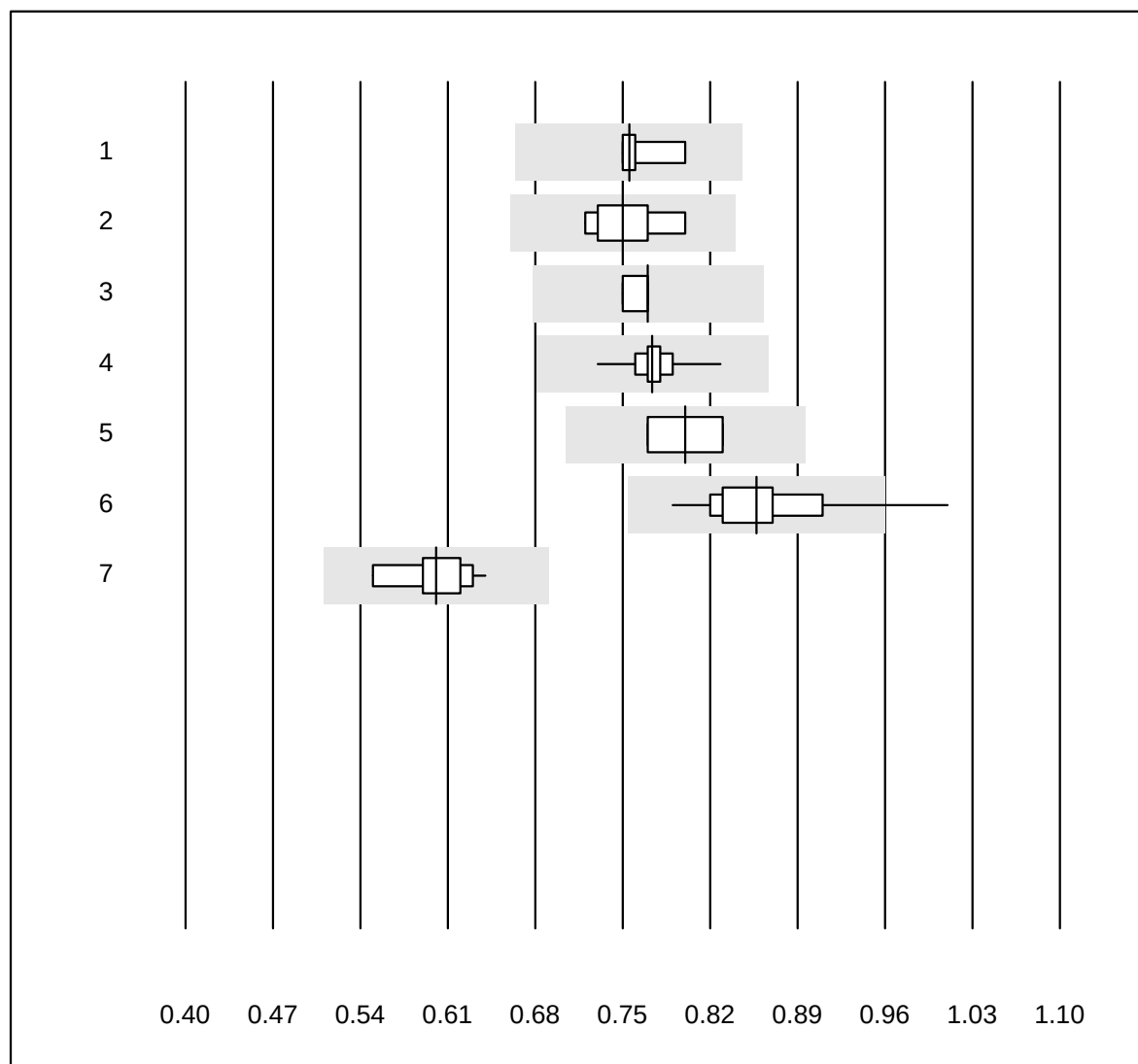


QUALAB Tolleranza : 12 %
(< 0.70: +/- 0.09 mmol/l)

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	0.76	3.1	e*
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	0.75	3.4	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	0.77	1.3	e
4 Roche	31	100.0	0.0	0.0	0.77	2.3	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	0.80	3.4	e
6 Fuji Dri-Chem	67	95.5	4.5	0.0	0.86	4.8	e
7 Spotchem D-Concept	39	97.4	0.0	2.6	0.60	4.5	e

9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Sodio

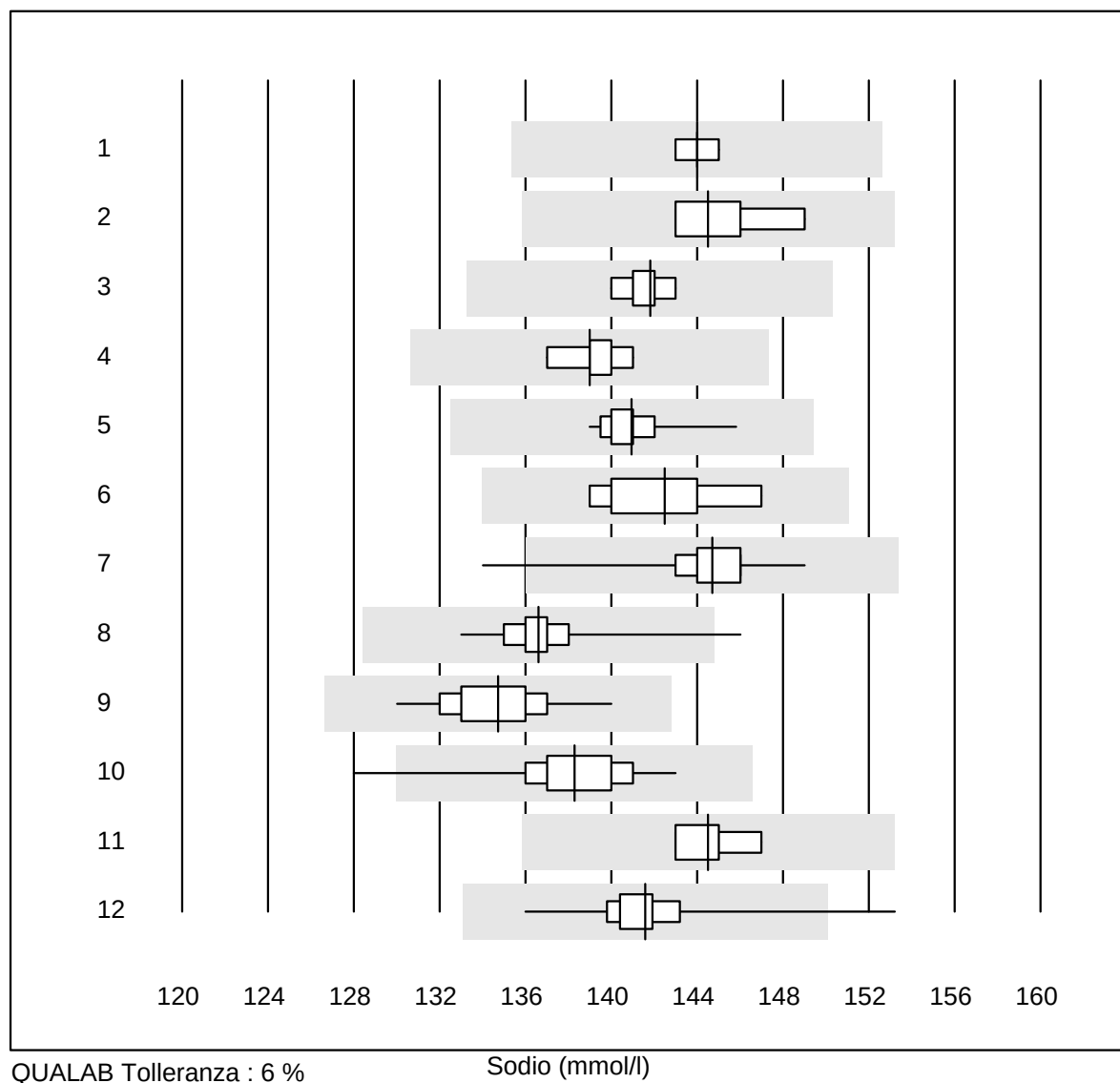

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	144	0.5	e
2 Autolyser	8	100.0	0.0	0.0	145	1.6	e
3 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	142	0.6	e
4 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	139	1.1	e
5 Roche	37	100.0	0.0	0.0	141	0.9	e
6 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	143	1.9	e
7 Fuji Dri-Chem	1064	99.4	0.2	0.4	145	1.1	e
8 Spotchem D-Concept	463	99.4	0.2	0.4	137	1.1	e
9 Spotchem EL-SE 1520	61	100.0	0.0	0.0	135	1.5	e
10 Piccolo	32	93.8	3.1	3.1	138	2.0	e
11 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	145	1.2	e
12 Exias	40	92.5	5.0	2.5	142	1.9	e
13 iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	141	0.8	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Fosfati

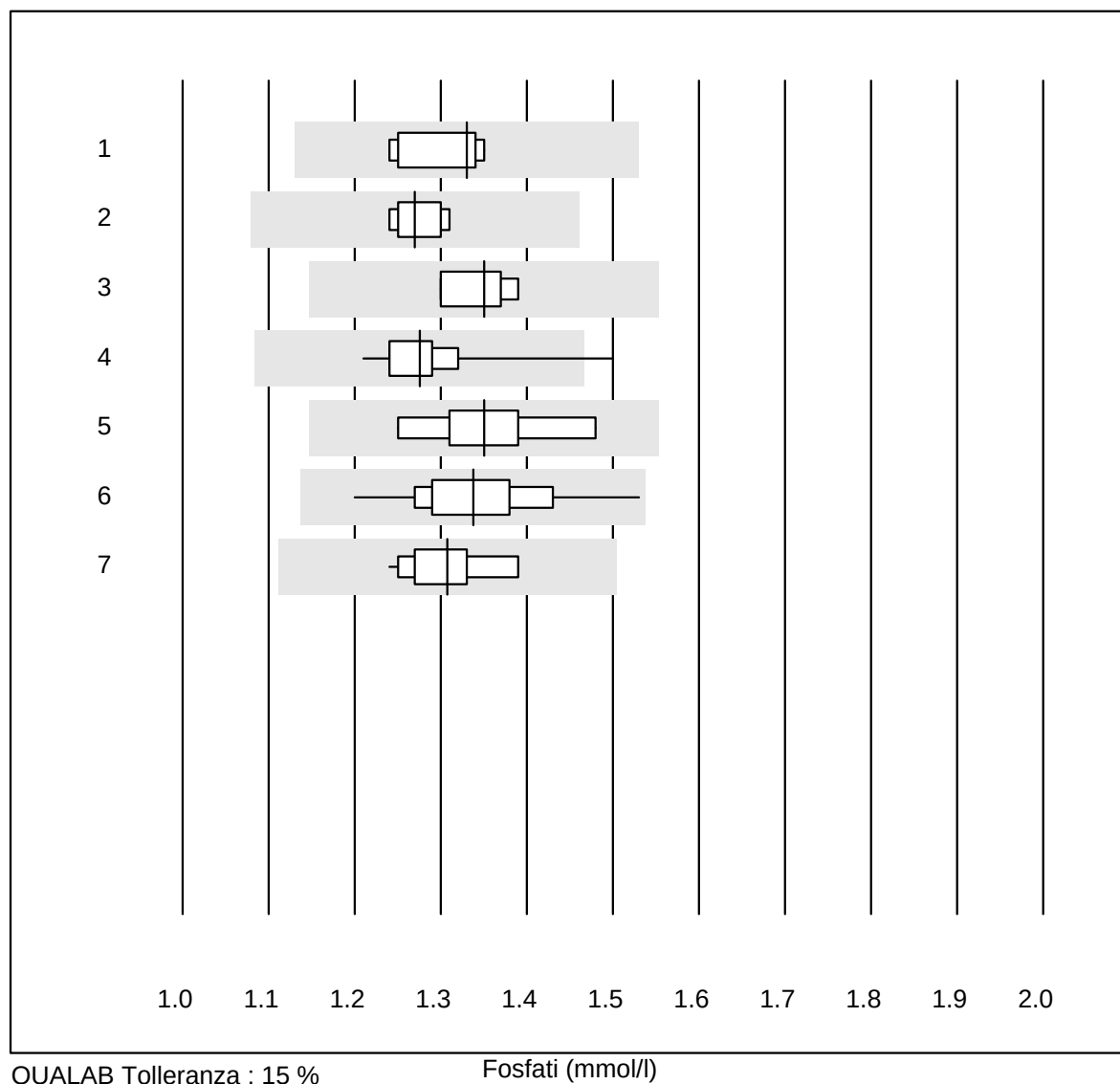

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	1.33	4.0	e*
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	1.27	2.2	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	1.35	3.0	e
4 Roche	35	97.1	2.9	0.0	1.28	3.9	e
5 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	1.35	5.2	e*
6 Fuji Dri-Chem	68	92.6	0.0	7.4	1.34	5.1	e
7 Spotchem D-Concept	15	93.3	0.0	6.7	1.31	3.7	e

10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Proteine totali

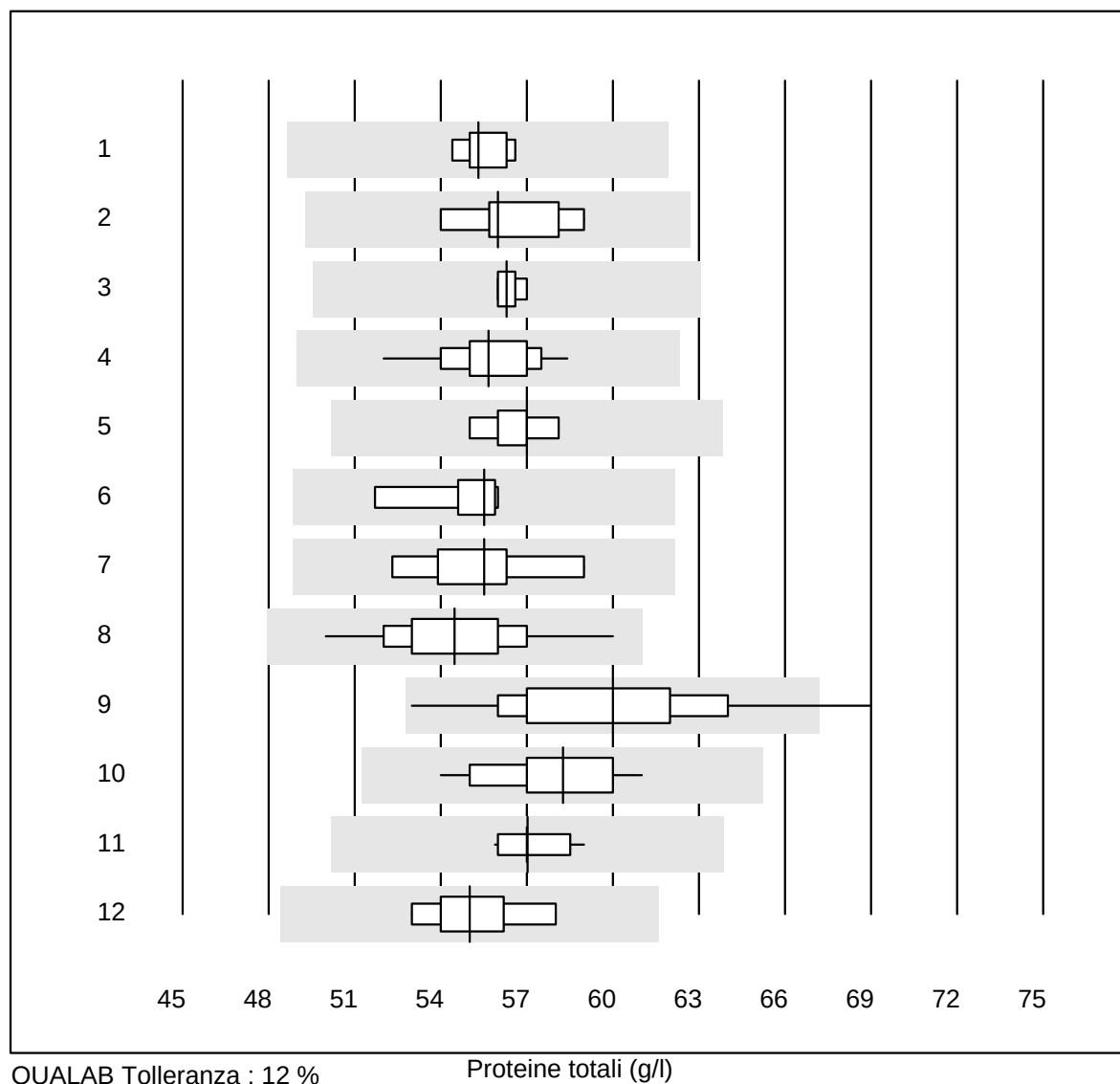


QUALAB Tolleranza : 12 %

Proteine totali (g/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	55.3	1.6	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	56.0	3.1	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	56.3	0.9	e
4 Roche	33	100.0	0.0	0.0	55.7	2.7	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	57.0	1.8	e
6 Autolyser	5	100.0	0.0	0.0	55.5	3.3	e*
7 Selectra Pro	6	100.0	0.0	0.0	55.5	4.1	e*
8 Fuji Dri-Chem	202	98.0	0.0	2.0	54.5	3.3	e
9 Spotchem D-Concept	188	96.3	0.5	3.2	60.0	5.1	e
10 Spotchem SP-4430	20	100.0	0.0	0.0	58.3	3.2	e
11 Piccolo	47	95.7	0.0	4.3	57.0	1.5	e
12 Skyla	7	100.0	0.0	0.0	55.0	3.1	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


Transaminasi GOT/AST

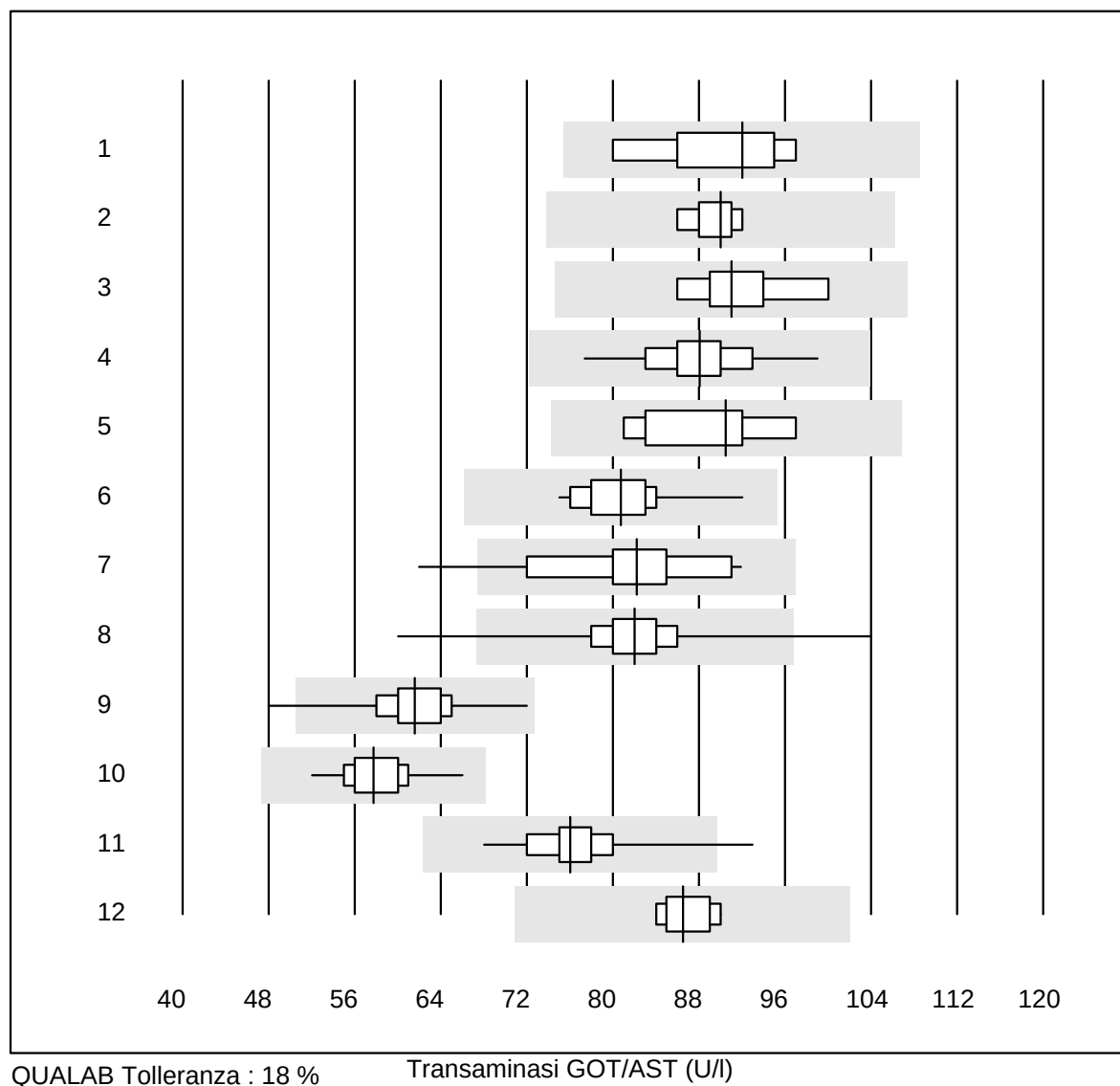

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	92	6.5	e*
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	90	2.2	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	91	5.8	e*
4 Roche	38	100.0	0.0	0.0	88	4.4	e
5 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	91	5.9	e
6 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	81	4.8	e
7 Selectra Pro	13	92.3	7.7	0.0	82	9.9	e*
8 Fuji Dri-Chem	1183	98.2	1.1	0.7	82	4.4	e
9 Spotchem D-Concept	617	99.3	0.2	0.5	62	5.0	e
10 Spotchem SP-4430	128	100.0	0.0	0.0	58	4.4	e
11 Piccolo	66	97.0	1.5	1.5	76	4.9	e
12 Skyla	8	100.0	0.0	0.0	87	2.6	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Transaminasi GPT/ALT

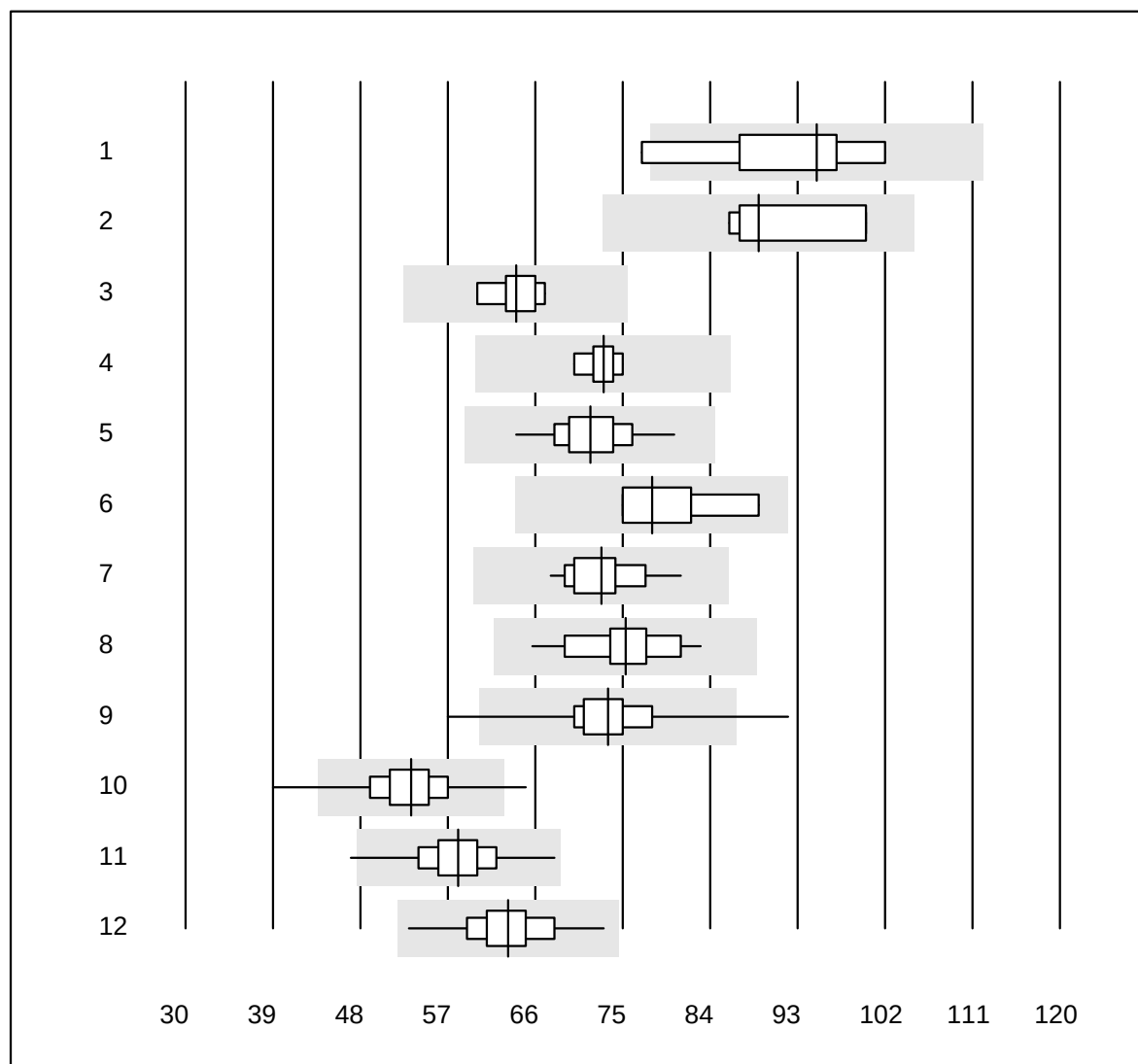


QUALAB Tolleranza : 18 %

Transaminasi GPT/ALT (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	5	80.0	20.0	0.0	95	10.7	e*
2 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	89	6.5	e*
3 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	64	3.6	e
4 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	73	2.6	e
5 Roche	38	100.0	0.0	0.0	72	4.6	e
6 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	78	7.3	e*
7 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	73	4.7	e
8 Selectra Pro	13	100.0	0.0	0.0	75	6.3	e
9 Fuji Dri-Chem	1208	98.3	0.5	1.2	73	4.6	e
10 Spotchem D-Concept	625	98.3	1.1	0.6	53	5.7	e
11 Spotchem SP-4430	129	99.2	0.8	0.0	58	5.6	e
12 Piccolo	63	90.5	0.0	9.5	63	5.7	e
13 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	73	2.2	e


Trigliceridi

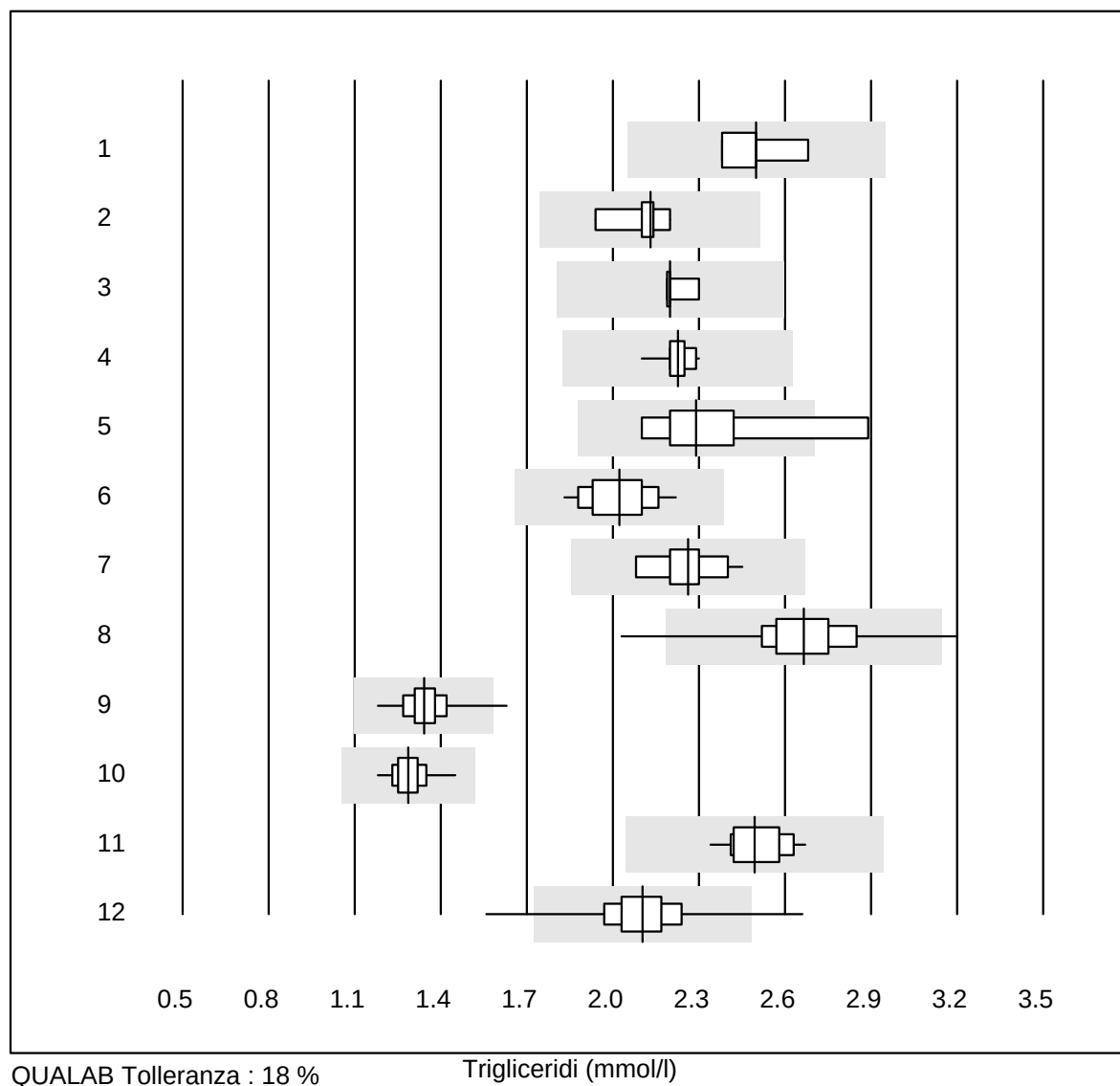

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	2.50	4.9	e*
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	2.13	3.4	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	2.20	2.3	e
4 Roche	31	100.0	0.0	0.0	2.23	2.0	e
5 Siemens	7	85.7	14.3	0.0	2.29	10.9	e*
6 Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	2.02	5.6	e
7 Selectra Pro	11	90.9	0.0	9.1	2.26	4.8	e
8 Fuji Dri-Chem	1000	98.5	0.4	1.1	2.67	4.9	e
9 Spotchem D-Concept	451	96.7	0.4	2.9	1.34	4.5	e
10 Spotchem SP-4430	69	100.0	0.0	0.0	1.29	3.6	e
11 Piccolo	22	100.0	0.0	0.0	2.49	3.6	e
12 Cholestech LDX	231	98.7	0.9	0.4	2.10	5.7	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Litio

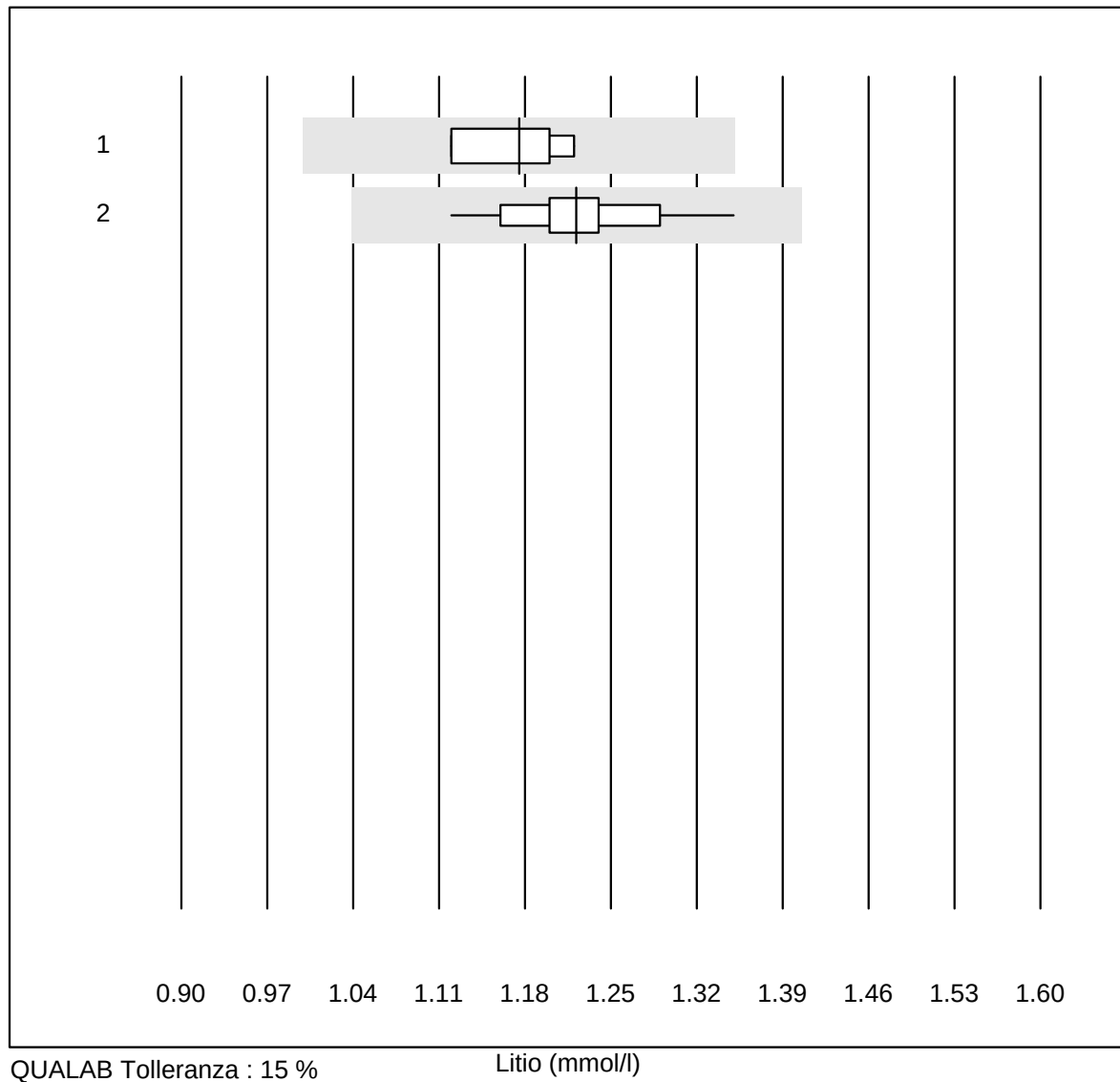

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	1.18	3.9	e*
2 Roche	17	100.0	0.0	0.0	1.22	4.2	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Lattato

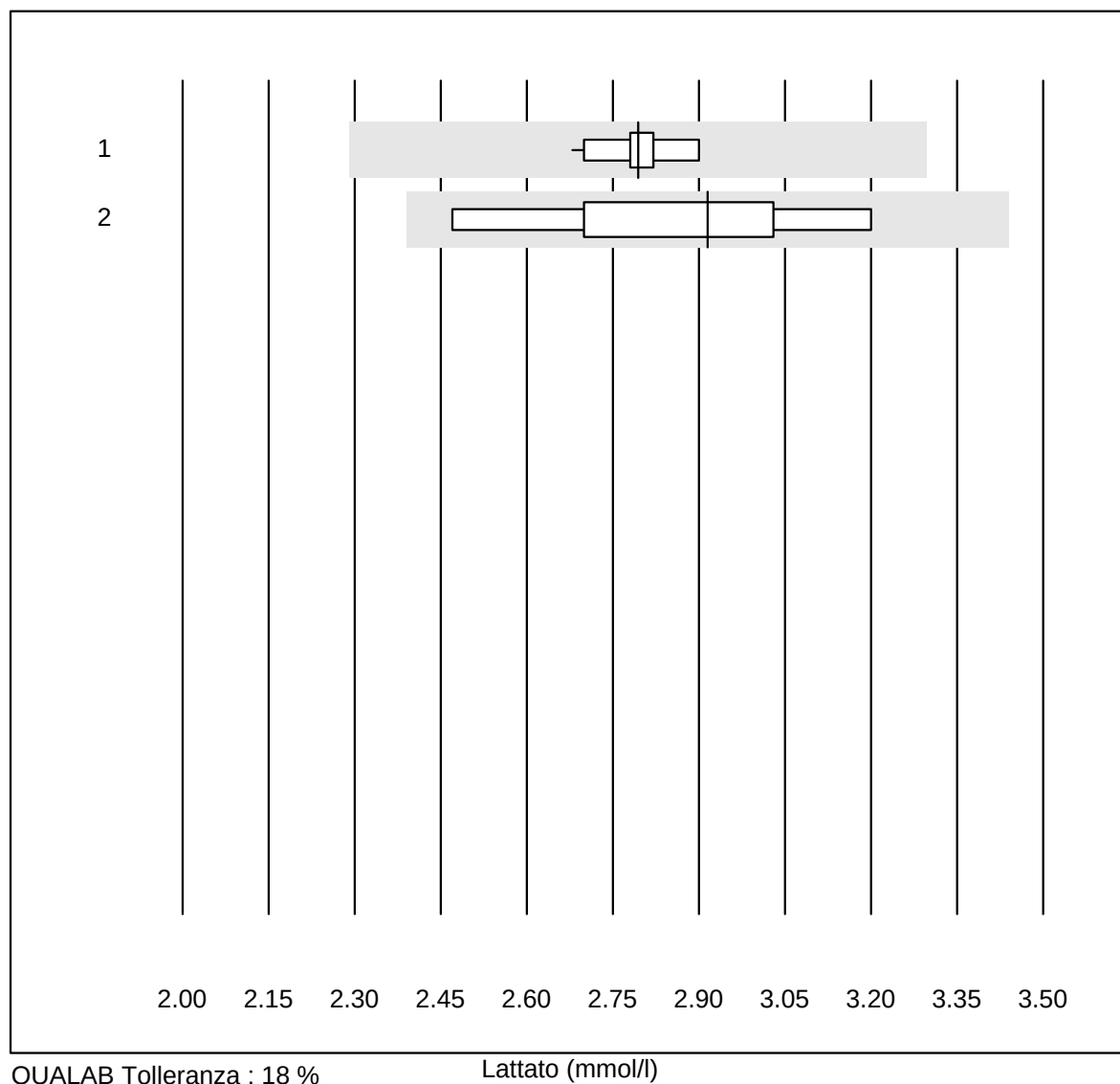


QUALAB Tolleranza : 18 %

Lattato (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	17	100.0	0.0	0.0	2.79	2.3	e
2 altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	2.92	7.9	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HbA1c campione A

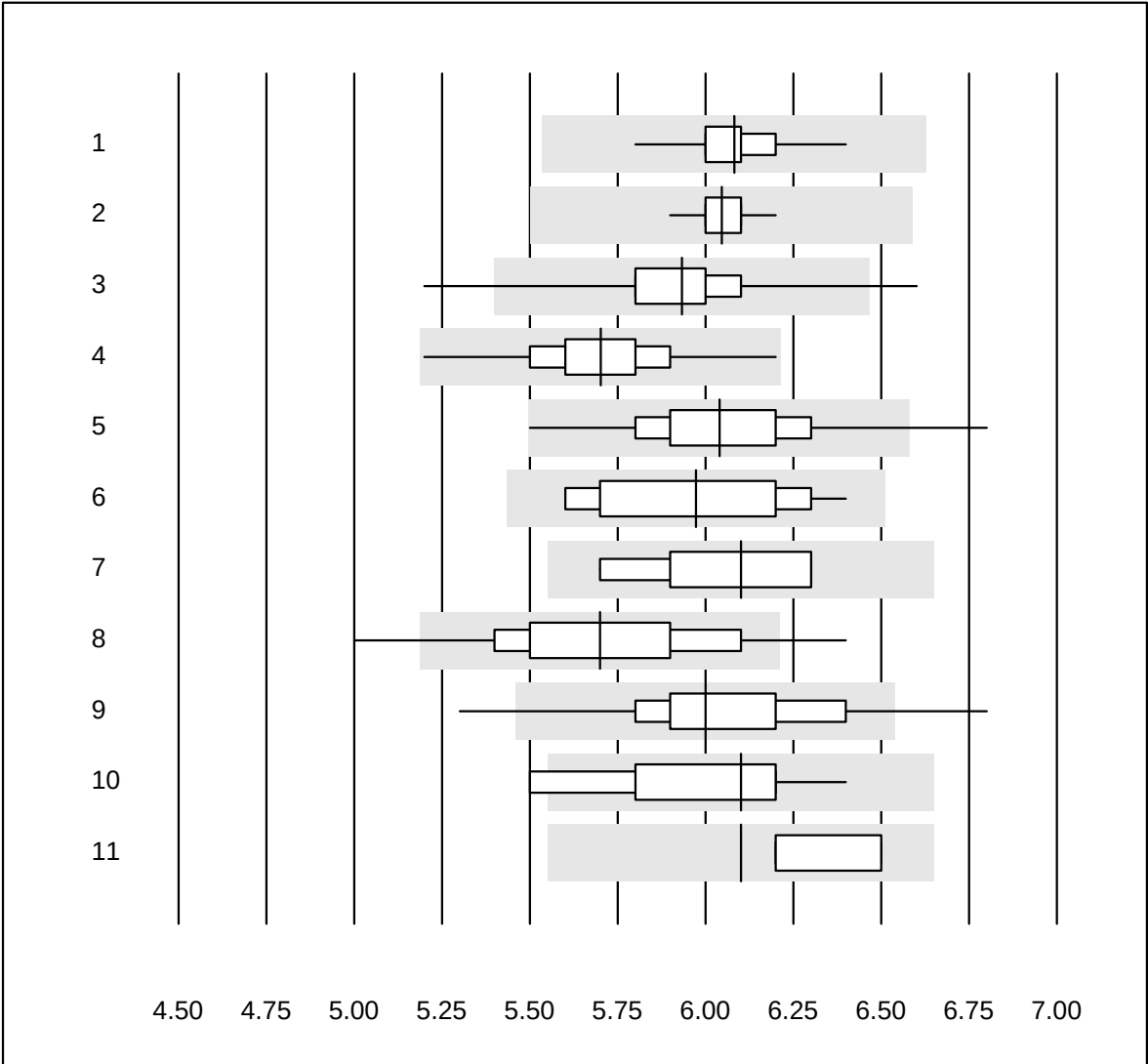


QUALAB Tolleranza : 9 %

HbA1c campione A (%)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche, Cobas	22	100.0	0.0	0.0	6.1	2.1	e
2	HPLC	13	100.0	0.0	0.0	6.0	1.3	e
3	Afinion	531	98.5	0.4	1.1	5.9	2.4	e
4	Cobas b101	232	100.0	0.0	0.0	5.7	3.1	e
5	DCA2000/Vantage	130	98.5	1.5	0.0	6.0	3.4	e
6	Celltac chemi	38	97.4	0.0	2.6	6.0	4.6	e
7	Eurolyser	7	100.0	0.0	0.0	6.1	3.6	c
8	A1c Now	209	91.4	4.8	3.8	5.7	4.9	e
9	AFIAS	166	94.0	4.8	1.2	6.0	4.3	e
10	Altri	13	69.2	7.7	23.1	6.1	4.4	c
11	Quick Read go	5	80.0	0.0	20.0	6.1	2.2	c

13 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HbA1c campione B

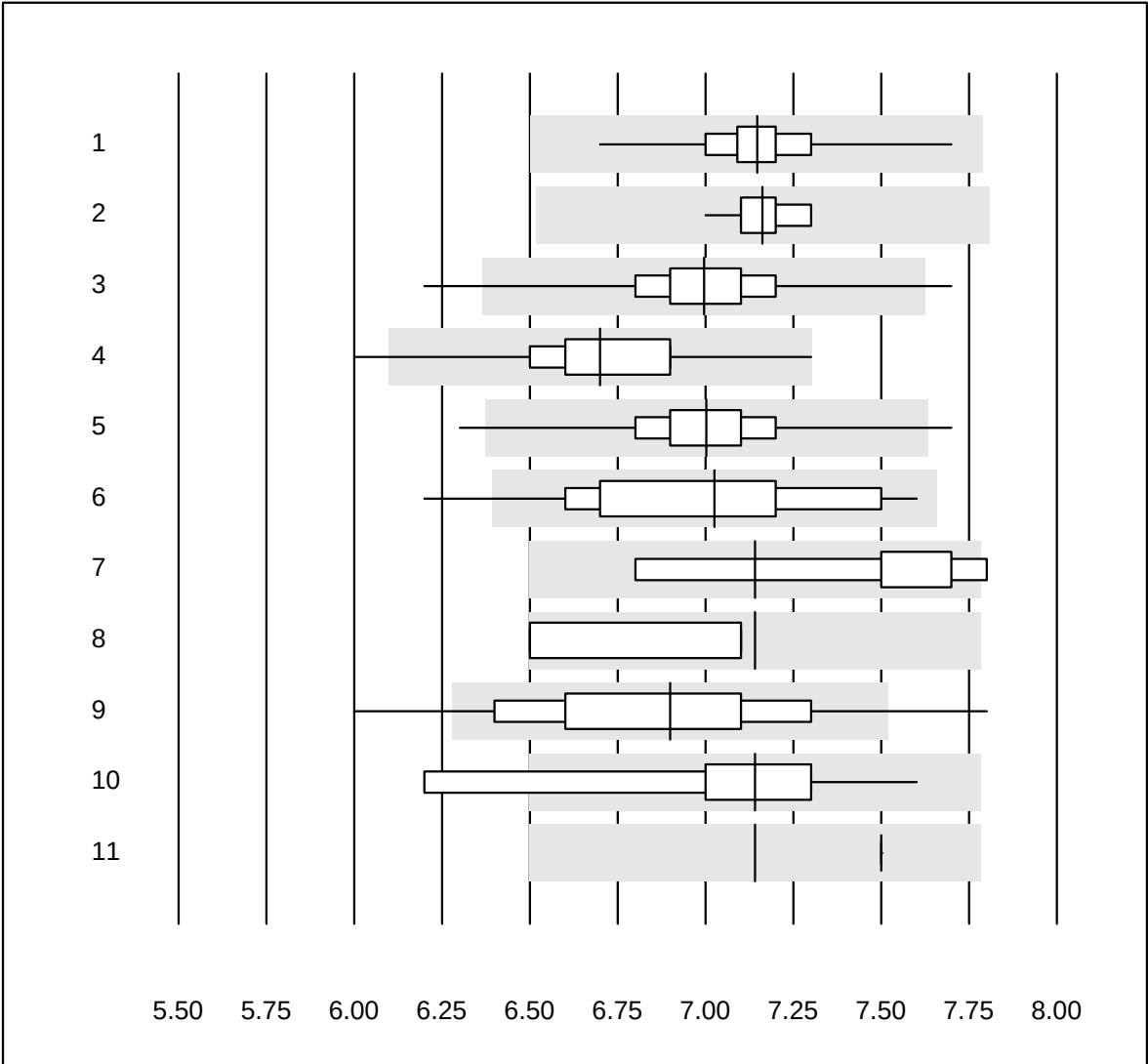


QUALAB Tolleranza : 9 %

HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche, Cobas	21	100.0	0.0	0.0	7.1	2.7	e
2 HPLC	13	100.0	0.0	0.0	7.2	1.3	e
3 Afinion	692	98.9	0.7	0.4	7.0	2.4	e
4 Cobas b101	215	99.1	0.9	0.0	6.7	2.9	e
5 DCA2000/Vantage	177	96.1	1.1	2.8	7.0	2.8	e
6 Celltac chemi	30	90.0	3.3	6.7	7.0	4.7	e
7 Eurolyser	5	80.0	20.0	0.0	7.1	5.4	c
8 A1c Now	7	100.0	0.0	0.0	7.1	4.1	c
9 AFIAS	231	93.1	5.6	1.3	6.9	5.0	e
10 Altri	12	75.0	8.3	16.7	7.1	5.4	c
11 Quick Read go	4	75.0	0.0	25.0	7.1	0.0	c

9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

pCO2

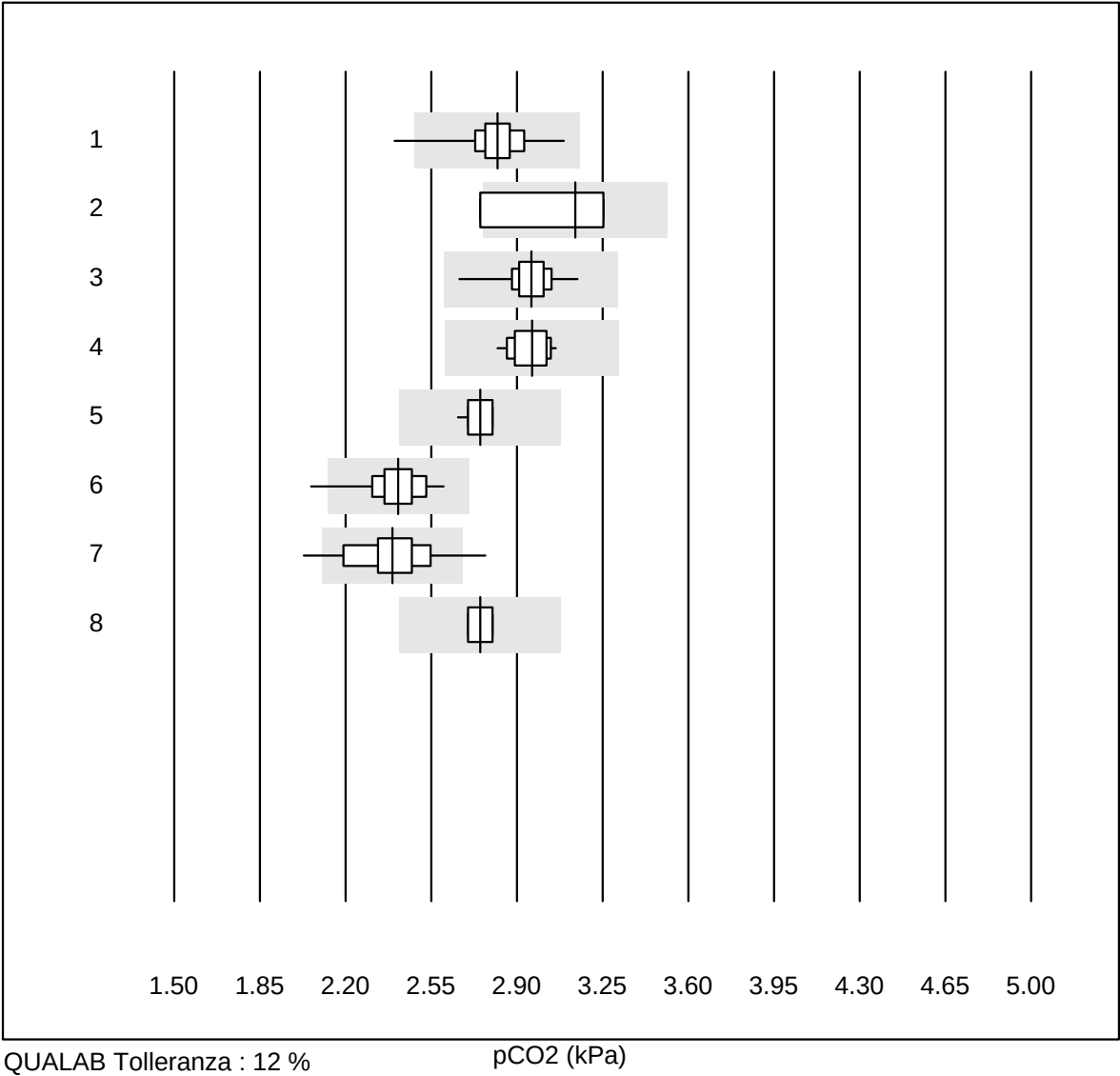


QUALAB Tolleranza : 12 %

pCO2 (kPa)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	106	99.1	0.9	0.0	2.82	3.1	e
2	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	50.0	25.0	25.0	3.14	8.4	e*
3	ABL90 FLEX / PLUS	145	100.0	0.0	0.0	2.96	2.4	e
4	Cobas b 123	19	94.7	0.0	5.3	2.96	2.5	e
5	GEM	11	100.0	0.0	0.0	2.75	2.1	e
6	iStat	56	98.2	1.8	0.0	2.42	3.9	e
7	EPOC	56	89.2	5.4	5.4	2.39	6.0	e
8	IL	4	100.0	0.0	0.0	2.75	2.1	e


8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

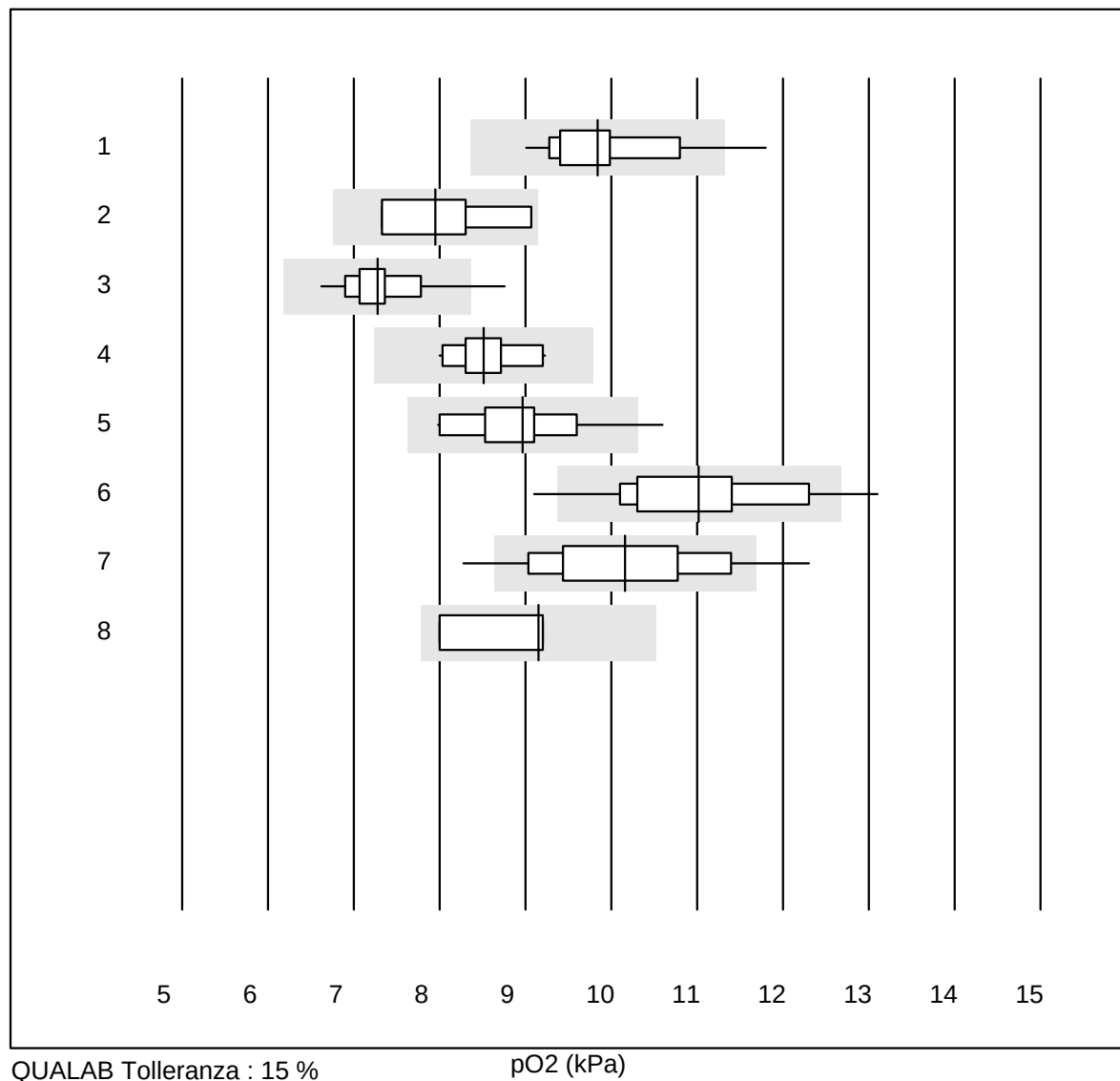pO₂

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	106	91.5	2.8	5.7	9.84	6.4	e
2 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	7.95	9.6	e*
3 ABL90 FLEX / PLUS	146	90.4	4.1	5.5	7.28	5.4	e
4 Cobas b 123	19	89.5	0.0	10.5	8.51	4.3	e
5 GEM	11	90.9	9.1	0.0	8.96	8.2	e*
6 iStat	54	85.1	5.6	9.3	11.02	7.7	e
7 EPOC	56	78.6	12.5	8.9	10.16	9.8	e
8 IL	4	100.0	0.0	0.0	9.15	6.6	e*

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

pH

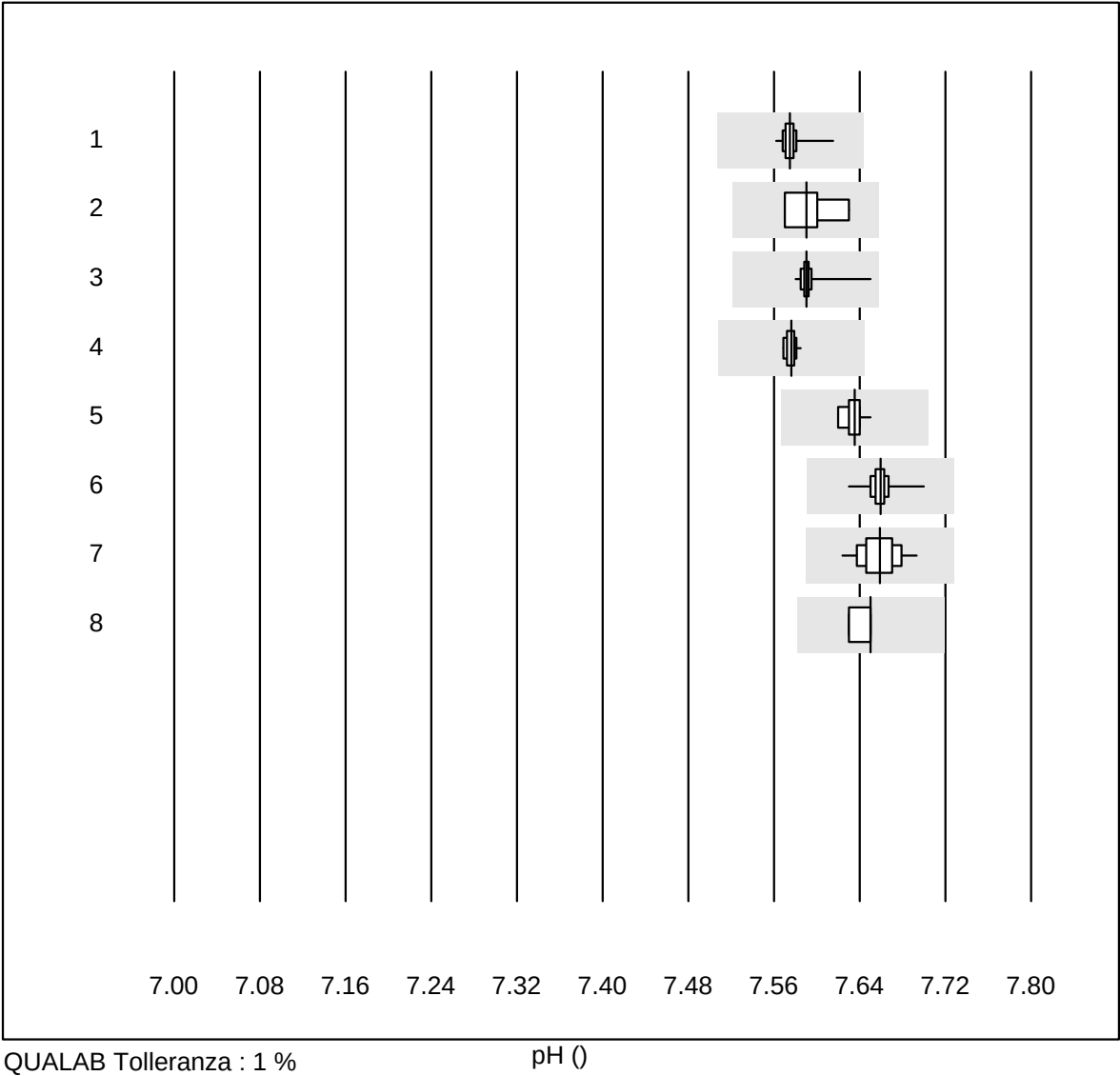


QUALAB Tolleranza : 1 %

pH ()

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	104	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e
2	ABL80 FLEX CO-OX / O	4	100.0	0.0	0.0	7.59	0.3	e*
3	ABL90 FLEX / PLUS	146	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
4	Cobas b 123	20	100.0	0.0	0.0	7.58	0.1	e
5	GEM	11	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e
6	iStat	58	100.0	0.0	0.0	7.66	0.1	e
7	EPOC	56	98.2	0.0	1.8	7.66	0.2	e
8	IL	4	100.0	0.0	0.0	7.65	0.1	e

9 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Glucosio GS

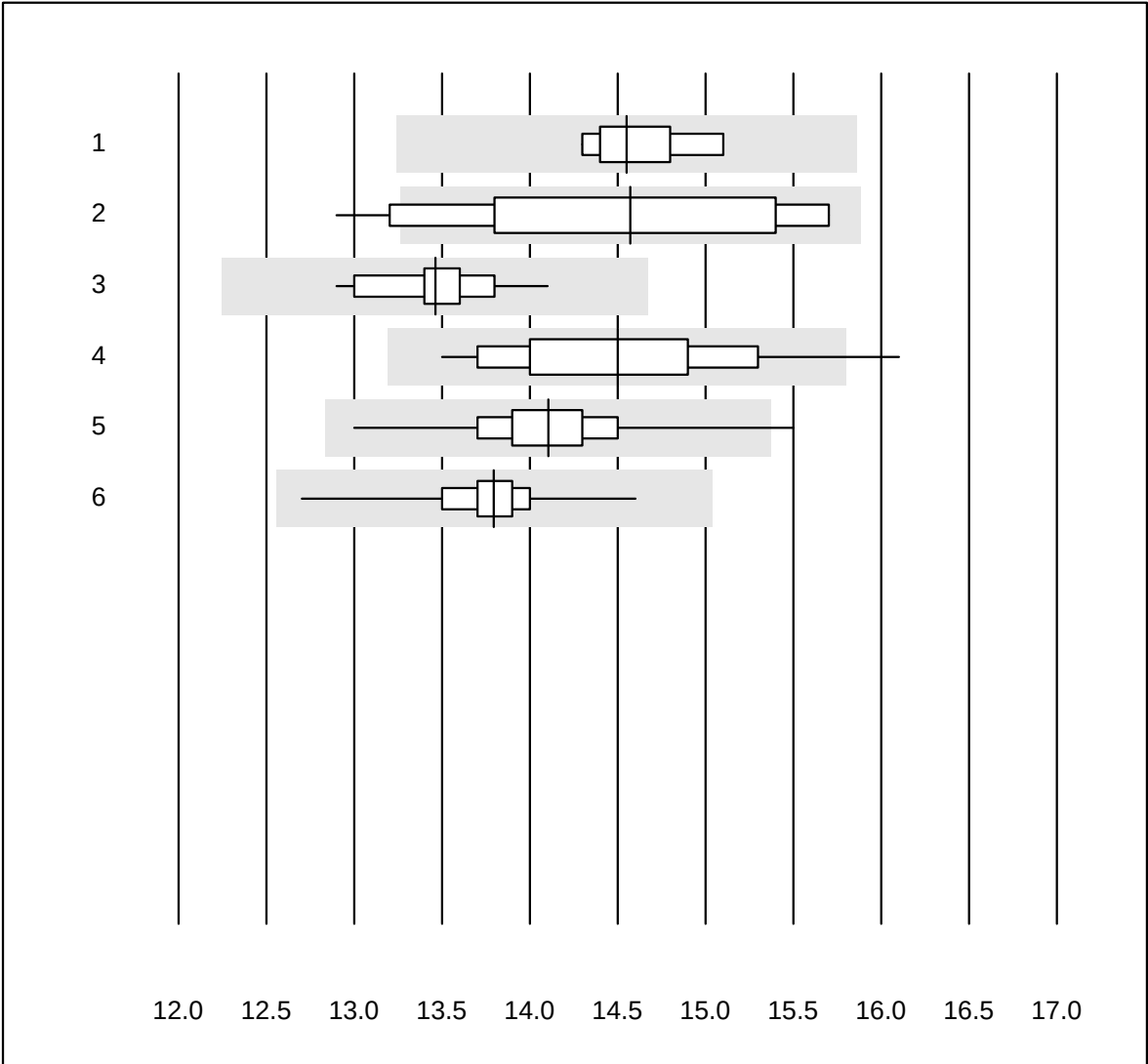


QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 GEM	8	100.0	0.0	0.0	14.6	2.0	e
2 Cobas b 123	12	75.0	16.7	8.3	14.6	6.7	e*
3 iStat	13	100.0	0.0	0.0	13.5	2.3	e
4 EPOC	43	95.4	2.3	2.3	14.5	4.4	e
5 ABL700/800	97	99.0	1.0	0.0	14.1	2.6	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	128	98.4	0.0	1.6	13.8	1.6	e

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Emoglobina BG

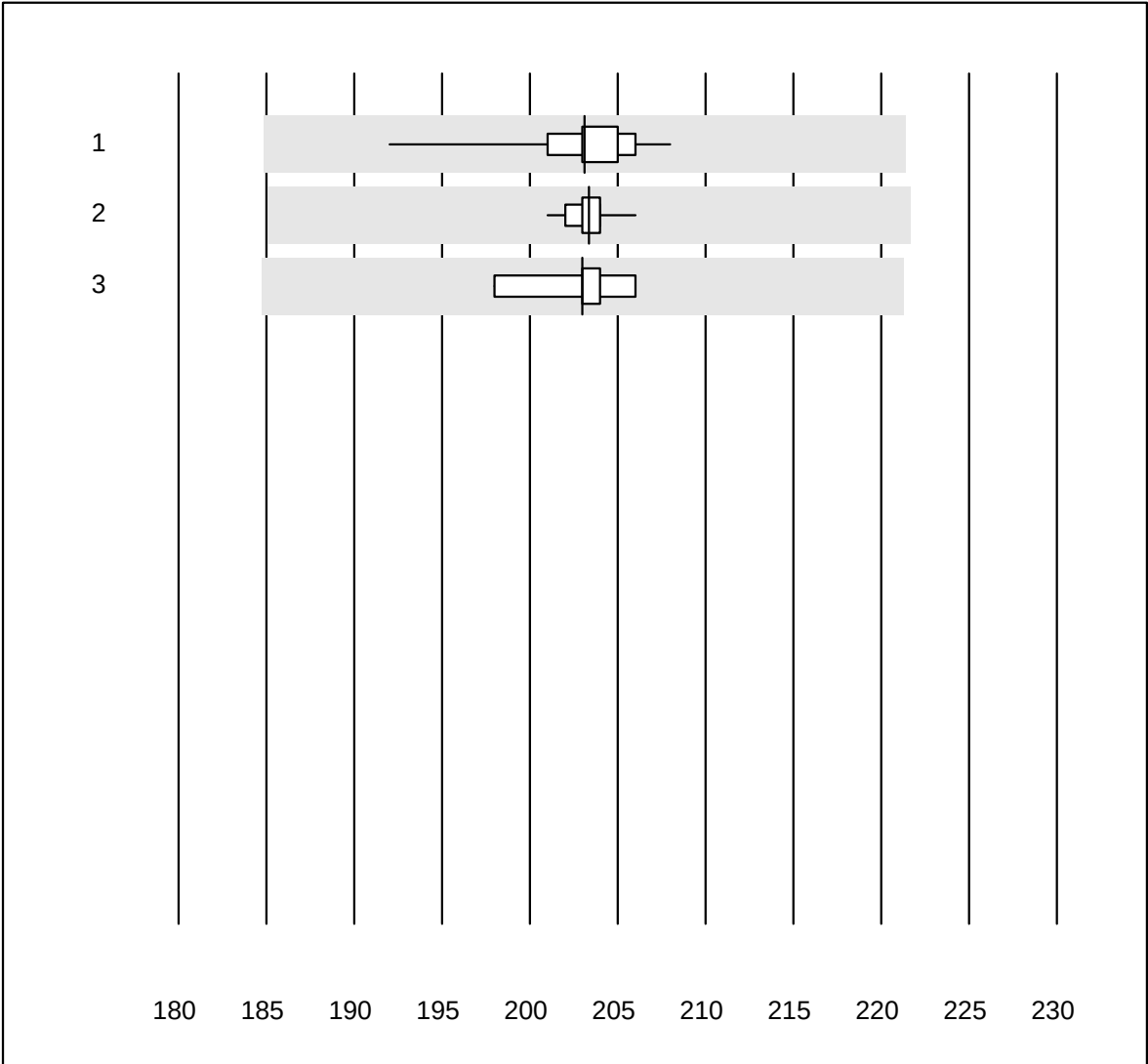


QUALAB Tolleranza : 9 %

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	98	99.0	0.0	1.0	203.1	1.6	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	132	99.2	0.0	0.8	203.4	0.4	e
3	ABL80 FLEX CO-OX / O	5	100.0	0.0	0.0	203.0	1.5	e

Potassio BG

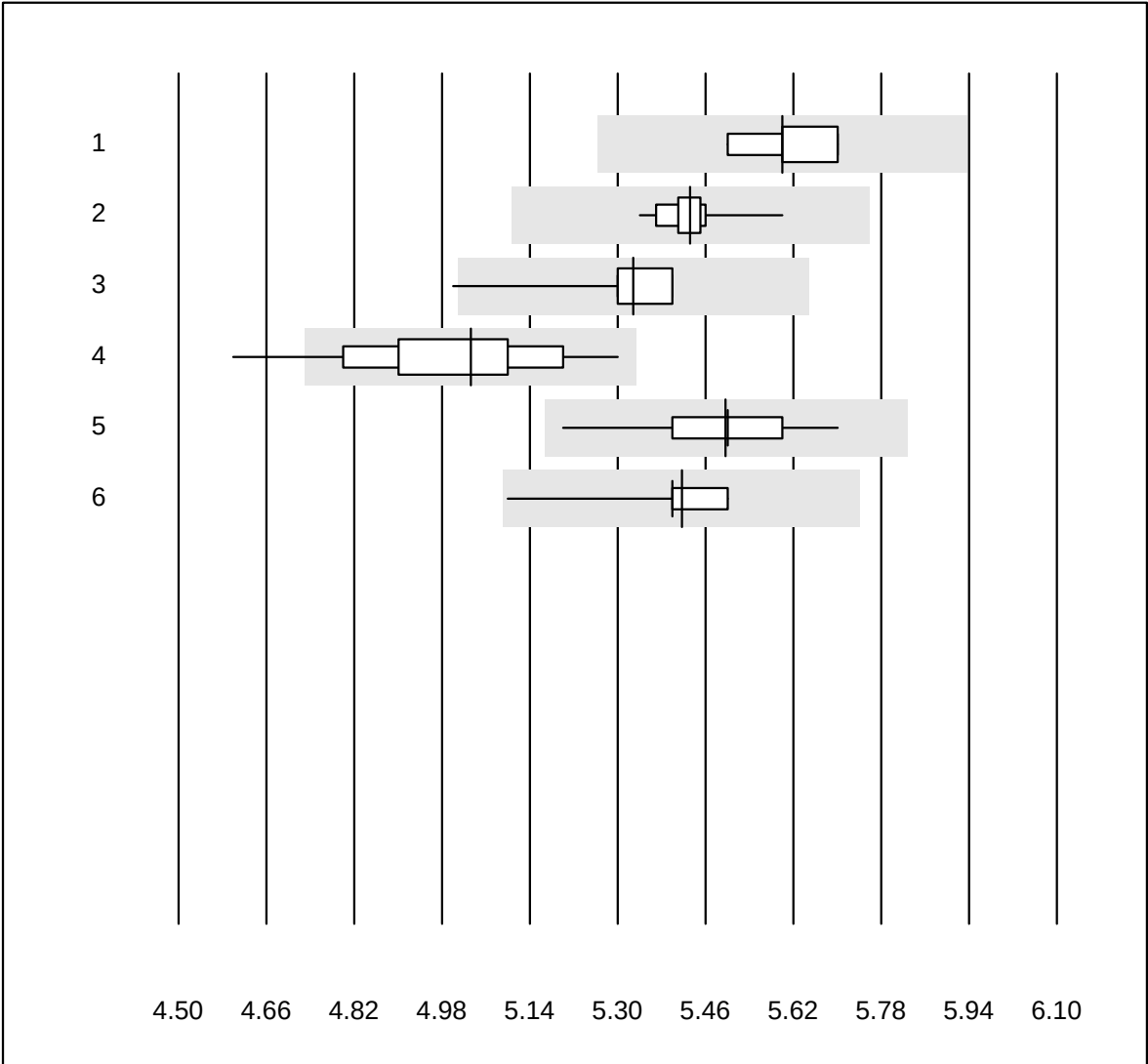


QUALAB Tolleranza : 6 %

Potassio BG (mmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	GEM	9	100.0	0.0	0.0	5.6	1.2	e
2	Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	5.4	0.9	e
3	iStat	21	95.2	4.8	0.0	5.3	1.7	e
4	EPOC	45	93.4	4.4	2.2	5.0	3.1	e
5	ABL700/800	97	100.0	0.0	0.0	5.5	1.4	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	135	99.3	0.0	0.7	5.4	0.9	e

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sodio BG

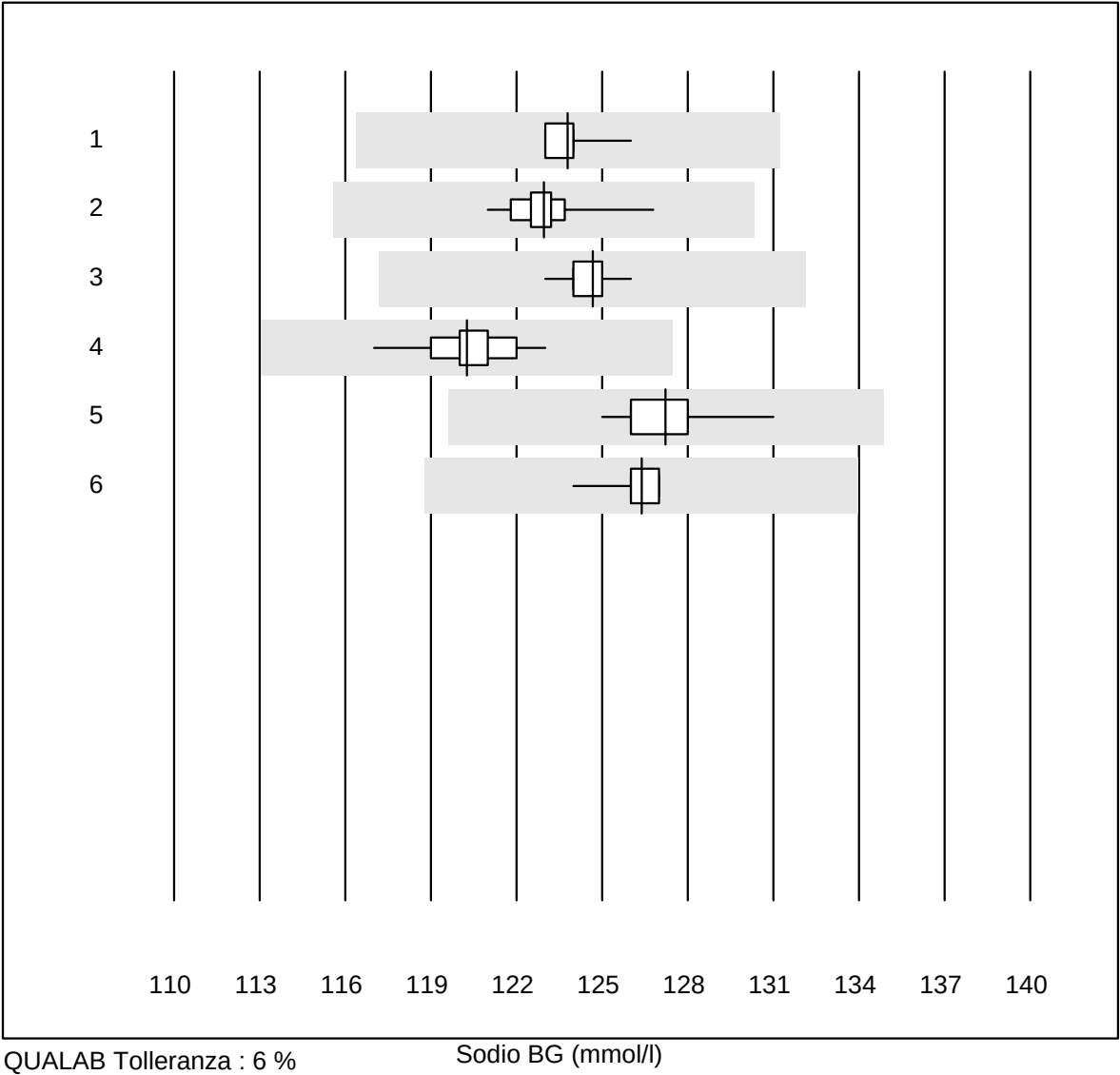


QUALAB Tolleranza : 6 %

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 GEM	10	100.0	0.0	0.0	123.8	0.7	e
2 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	123.0	0.9	e
3 iStat	21	100.0	0.0	0.0	124.7	0.6	e
4 EPOC	44	97.7	0.0	2.3	120.3	1.1	e
5 ABL700/800	96	100.0	0.0	0.0	127.2	0.9	e
6 ABL90 FLEX / PLUS	134	100.0	0.0	0.0	126.4	0.4	e

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Cloruro-BG

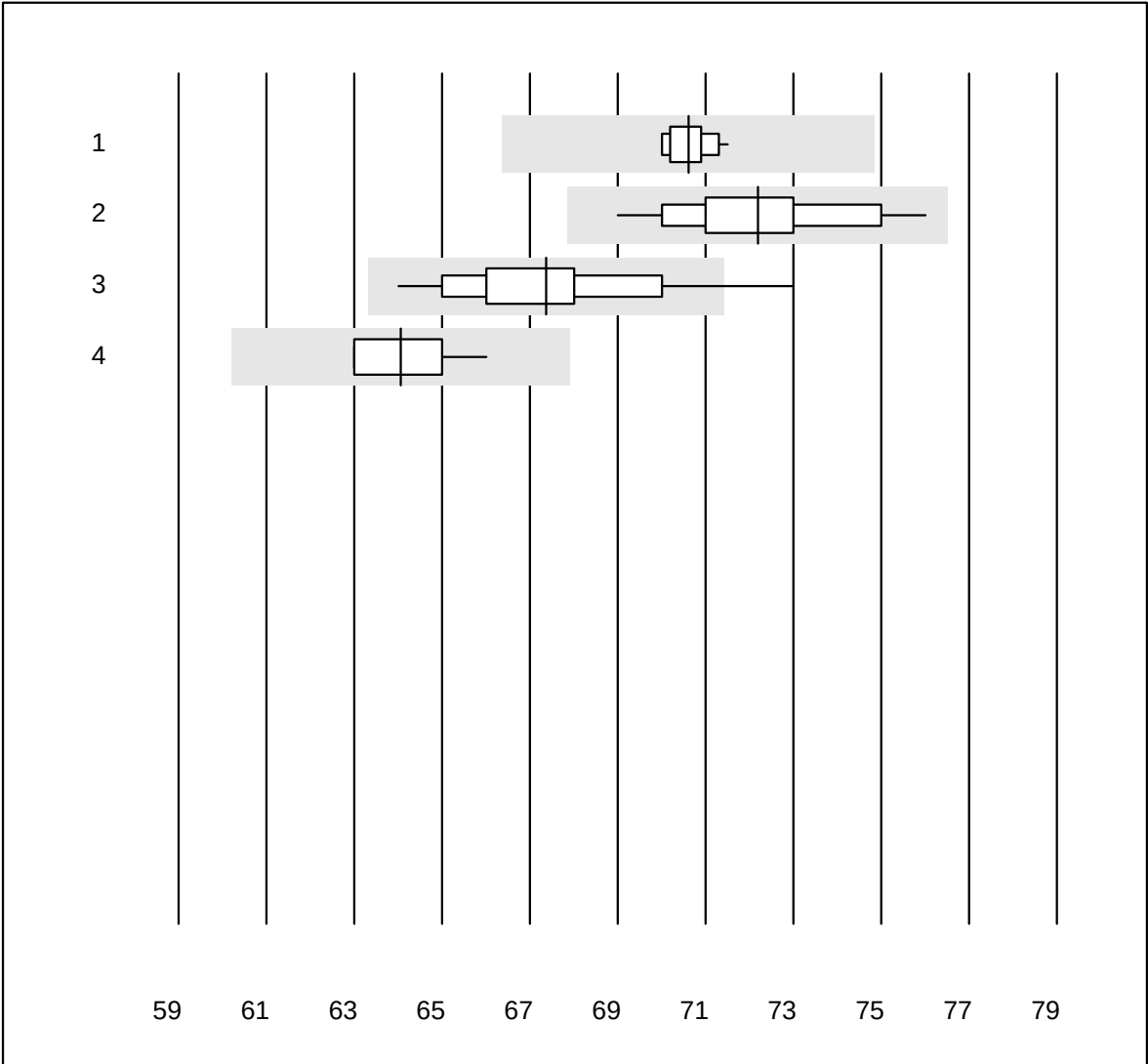


QUALAB Tolleranza : 6 %

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	70.6	0.7	e
2 EPOC	17	94.1	0.0	5.9	72.2	2.6	e
3 ABL700/800	94	93.6	4.3	2.1	67.4	2.8	e
4 ABL90 FLEX / PLUS	130	100.0	0.0	0.0	64.1	1.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Calcio-BG

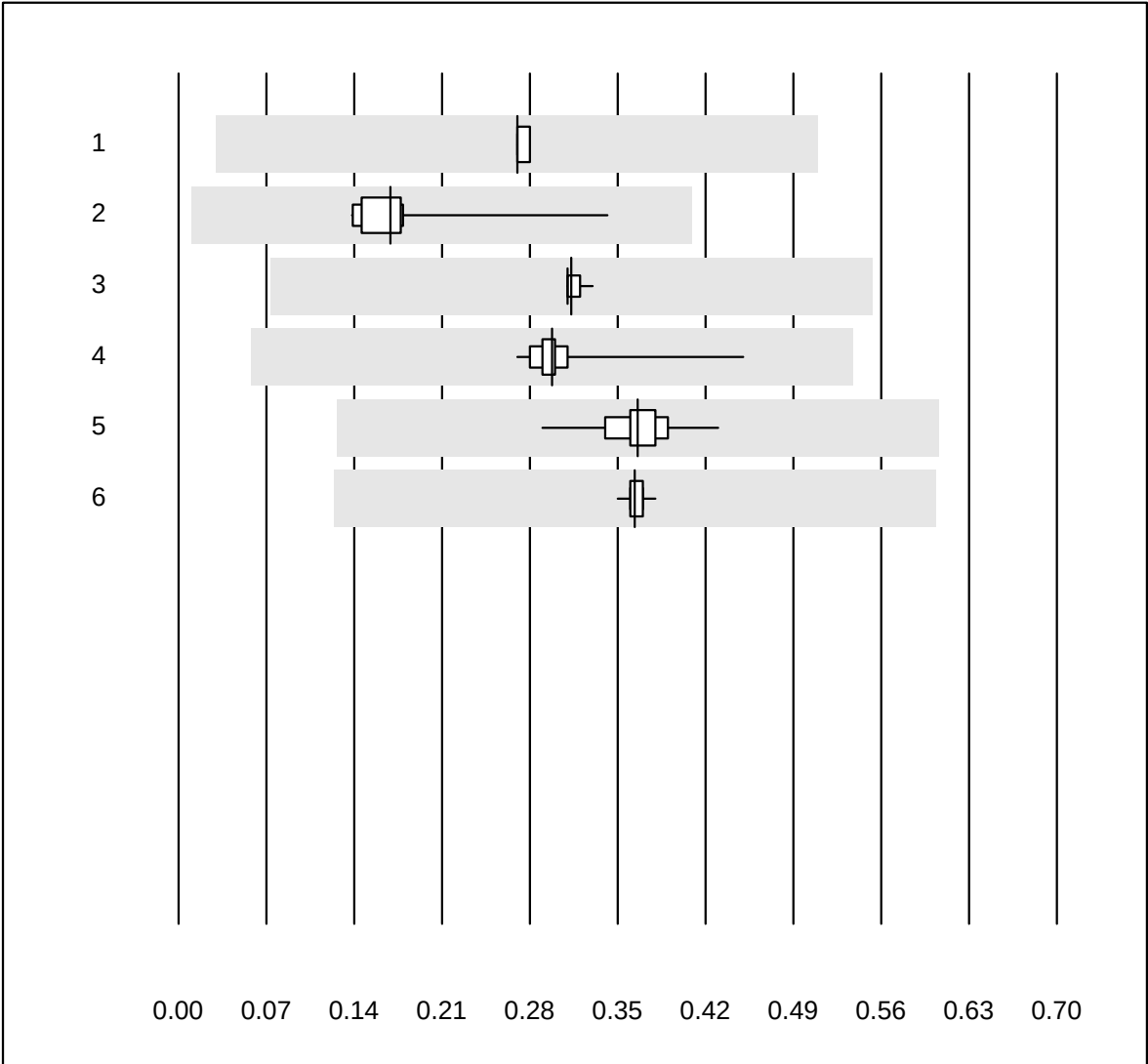


Tolleranza MQ : 12 %
(< 2.00: +/- 0.24 mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	GEM	9	100.0	0.0	0.0	0.27	1.9	e
2	Cobas b123	13	100.0	0.0	0.0	0.17	32.1	e*
3	iStat	18	100.0	0.0	0.0	0.31	1.8	e
4	EPOC	41	97.6	0.0	2.4	0.30	9.5	e*
5	ABL700/800	96	100.0	0.0	0.0	0.37	5.7	e
6	ABL90 FLEX / PLUS	133	100.0	0.0	0.0	0.36	1.4	e


8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

FHHb

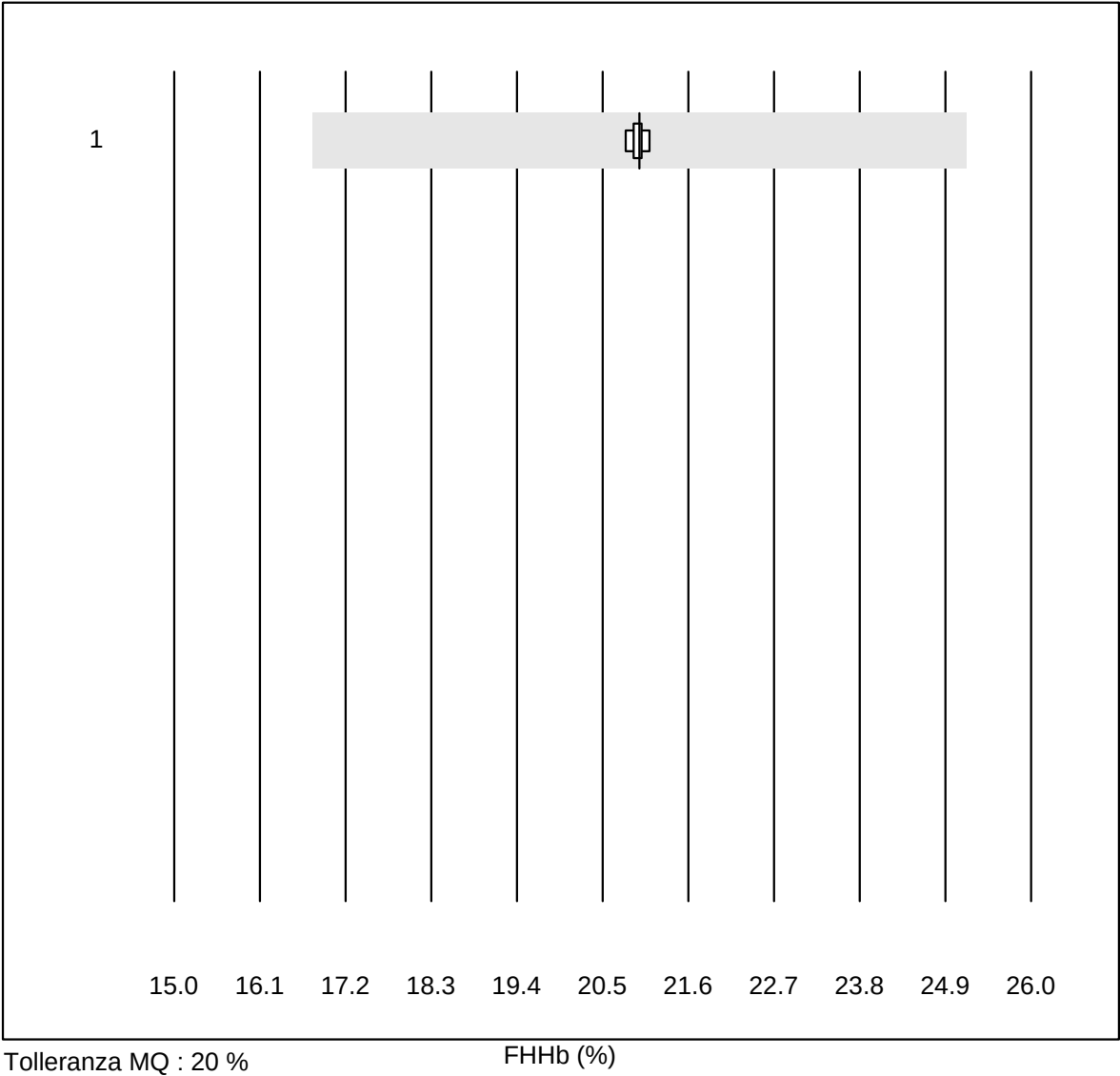

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL90 FLEX / PLUS	18	100.0	0.0	0.0	20.972	0.4	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Lattato-BG

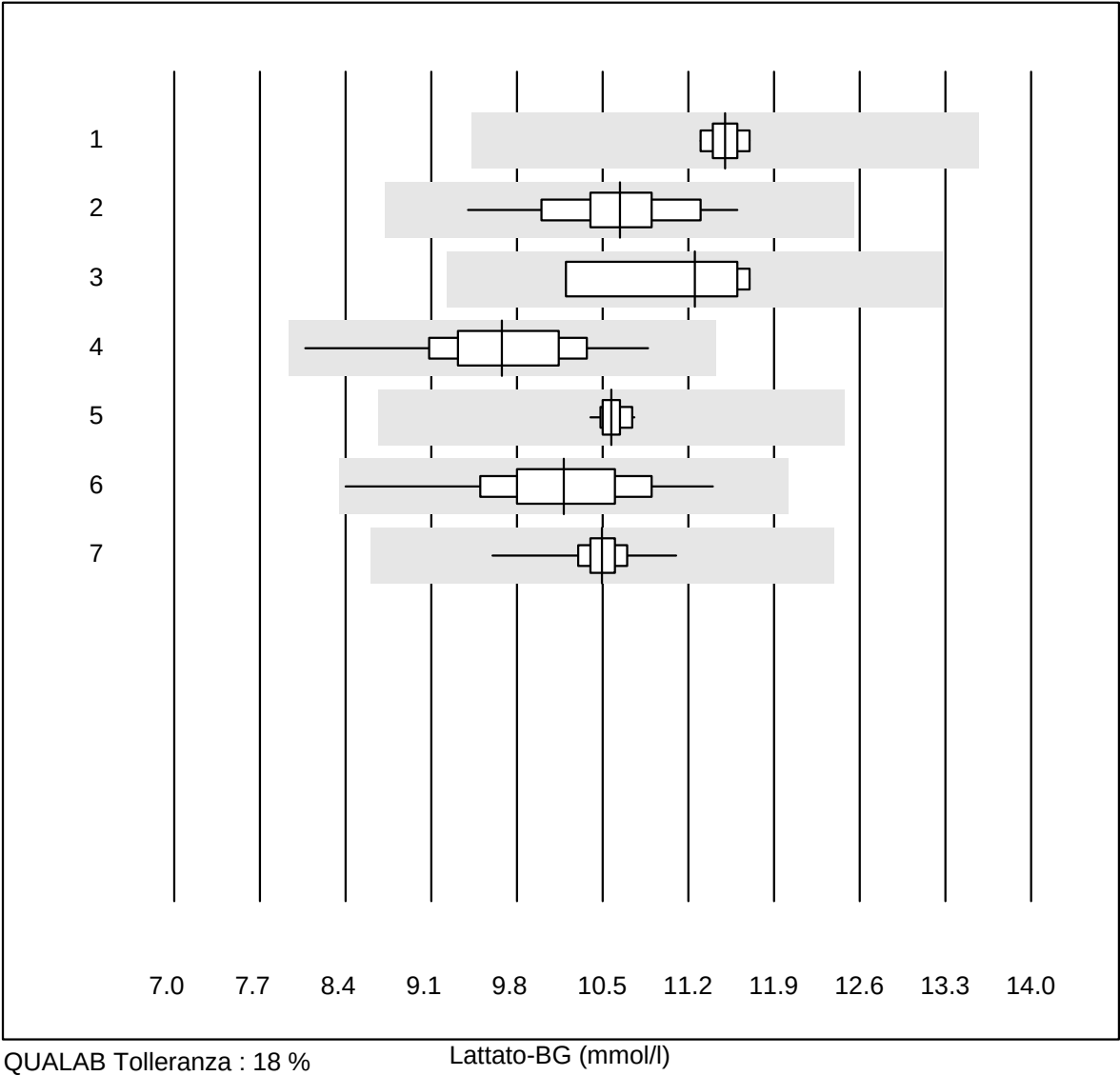


QUALAB Tolleranza : 18 %

Lattato-BG (mmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	GEM	9	100.0	0.0	0.0	11.50	1.3	e
2	Cobas b123	12	100.0	0.0	0.0	10.64	5.5	e
3	IL	4	100.0	0.0	0.0	11.25	6.3	e*
4	EPOC	42	97.6	0.0	2.4	9.68	5.7	e
5	iStat	21	100.0	0.0	0.0	10.57	1.0	e
6	ABL700/800	102	99.0	0.0	1.0	10.18	5.5	e
7	ABL90 FLEX / PLUS	138	99.3	0.0	0.7	10.50	1.7	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

sO2 OR

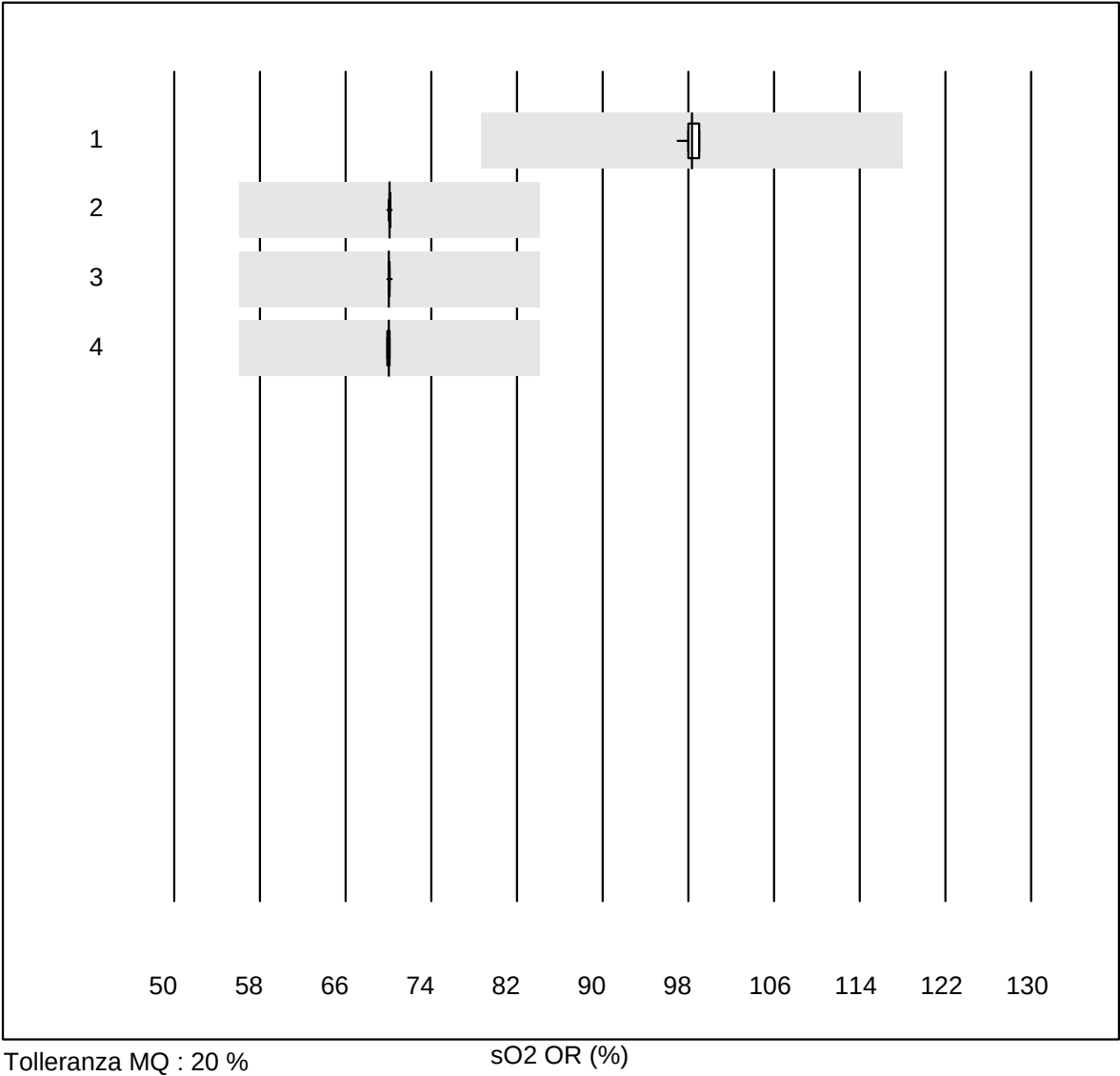


Tolleranza MQ : 20 %

sO2 OR (%)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 iStat	30	100.0	0.0	0.0	98.367	0.6	e
2 ABL700/800	89	97.8	0.0	2.2	70.121	0.1	e
3 ABL90 FLEX / PLUS	122	100.0	0.0	0.0	70.054	0.1	e
4 ABL80 FLEX CO-OX / O	4	75.0	0.0	25.0	70.050	0.1	e

FO2Hb OR

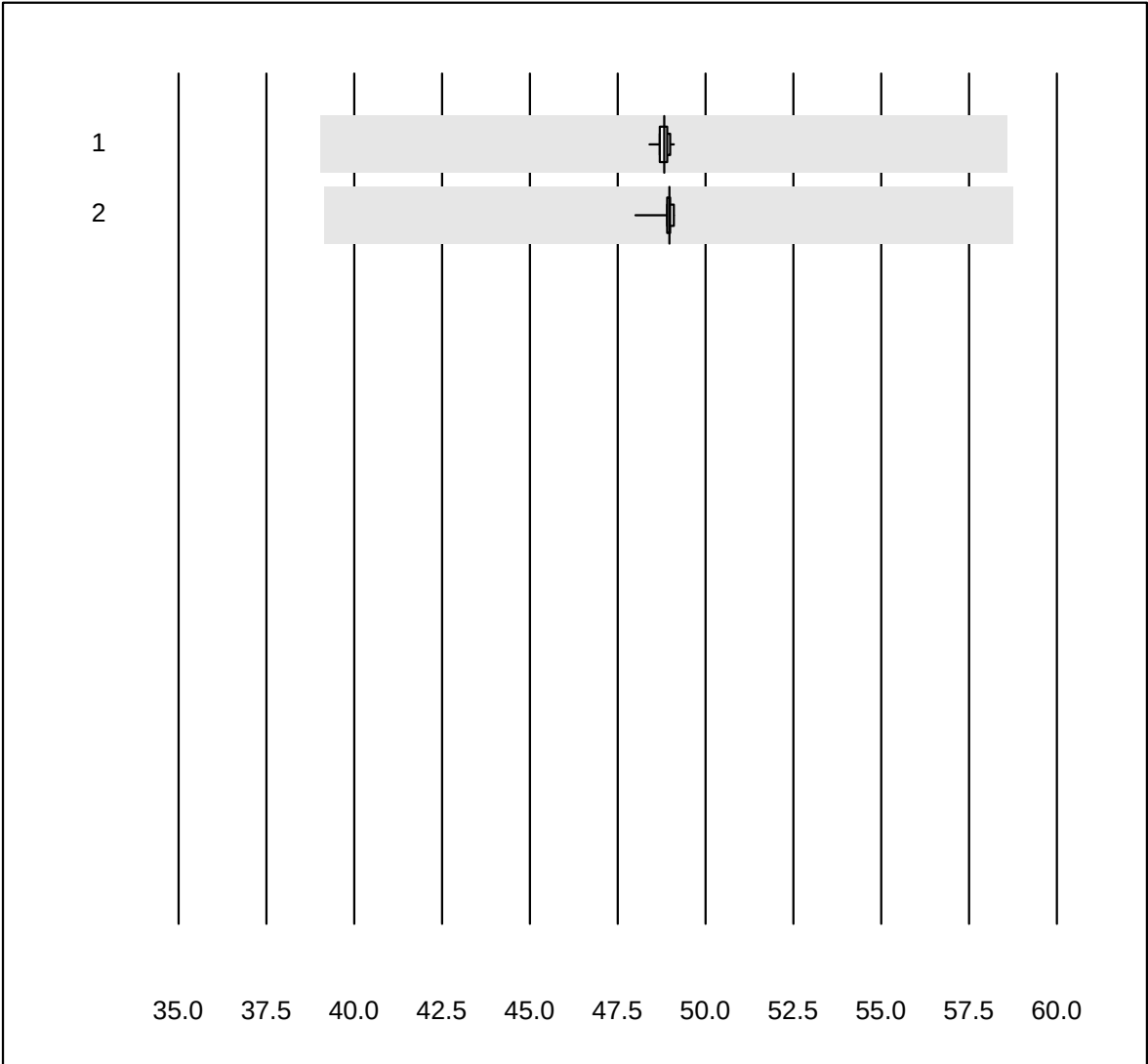


Tolleranza MQ : 20 %

FO2Hb OR (%)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	48.822	0.3	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	123	99.2	0.0	0.8	48.961	0.2	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

FCOHb OR

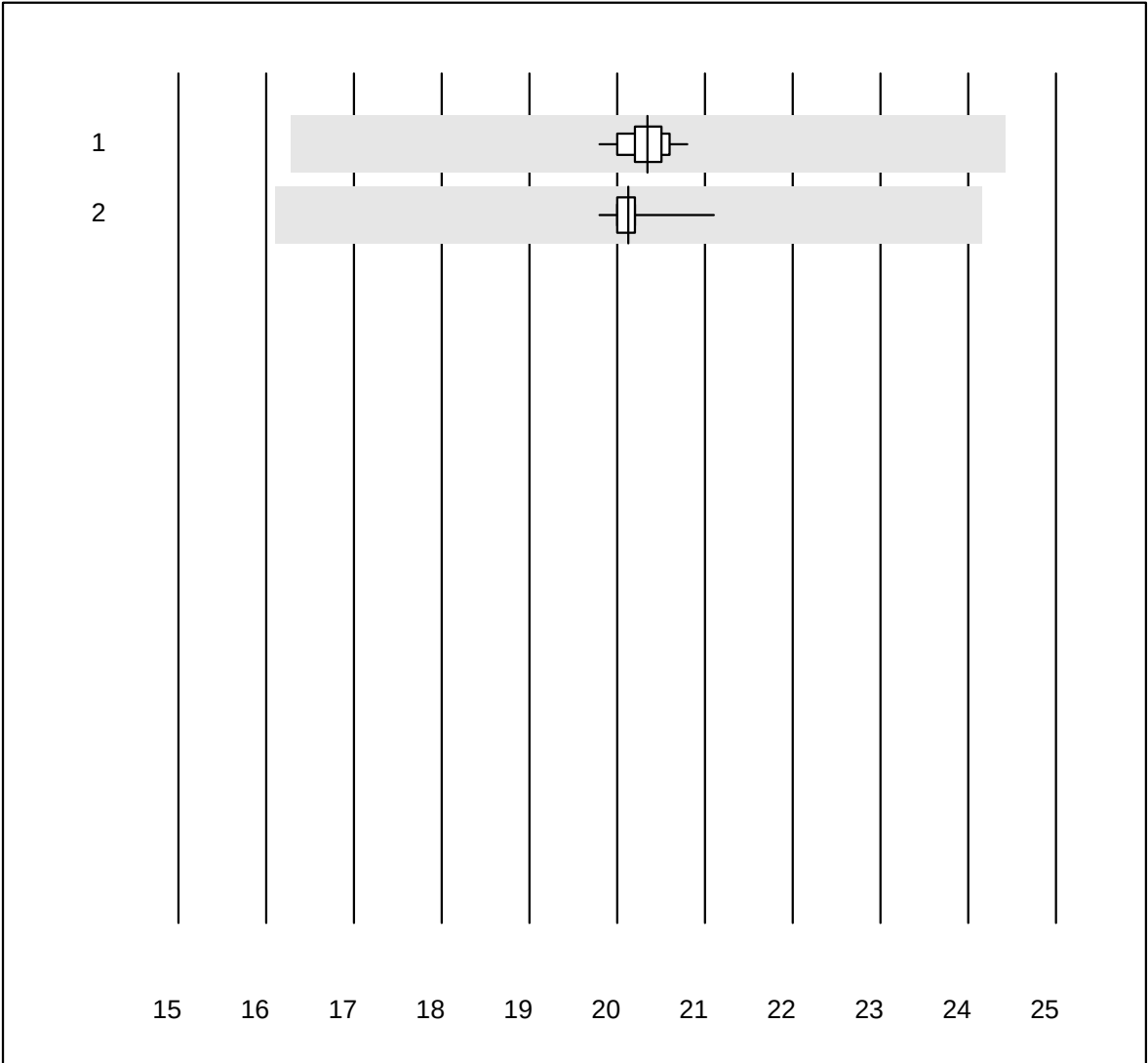


Tolleranza MQ : 20 %

FCOHb OR (%)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	20.348	1.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	124	99.2	0.0	0.8	20.123	0.8	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

FMetHb OR

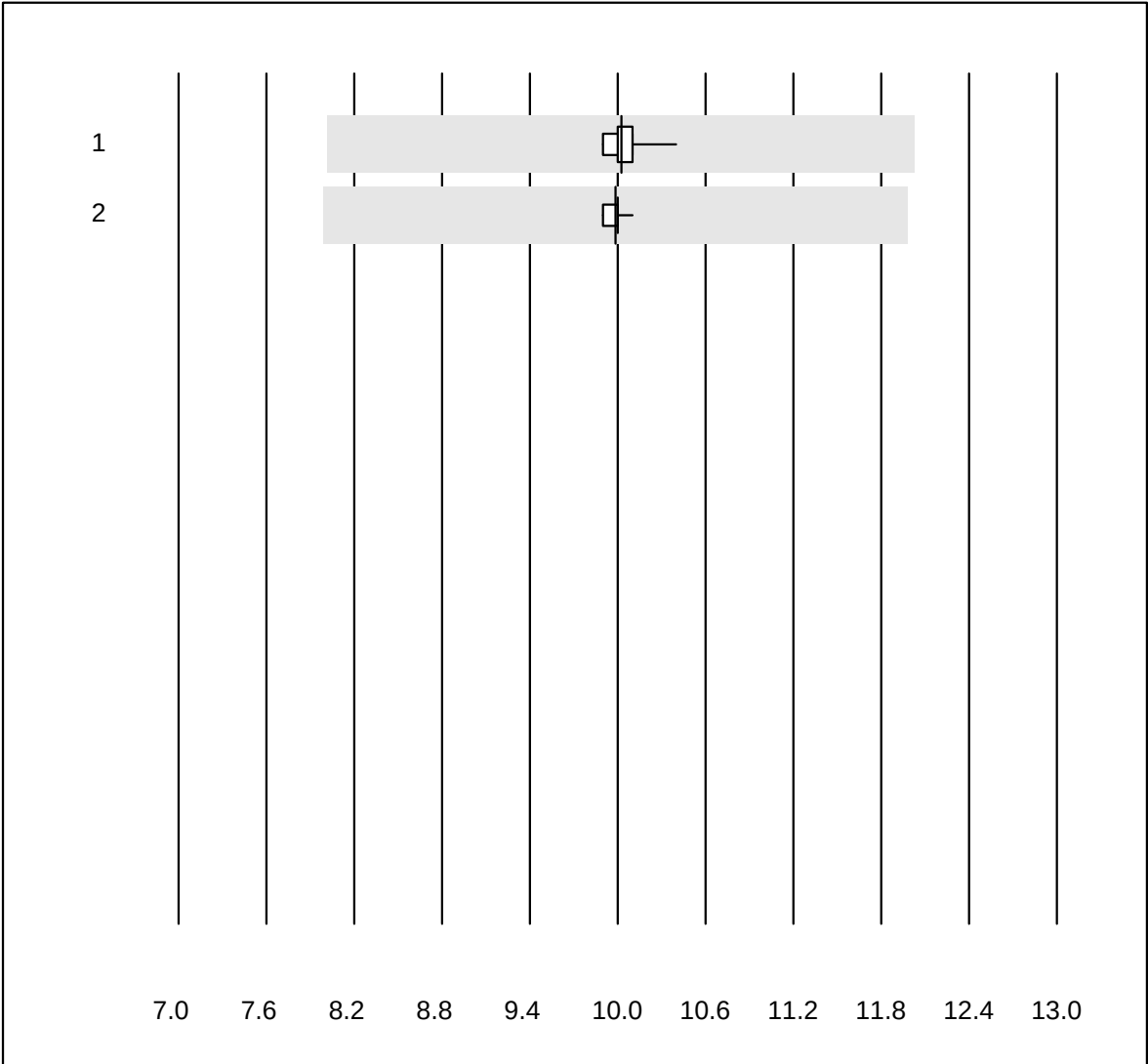


Tolleranza MQ : 20 %

FMetHb OR (%)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	88	100.0	0.0	0.0	10.023	0.9	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	124	96.8	0.0	3.2	9.983	0.5	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

FHbF OR

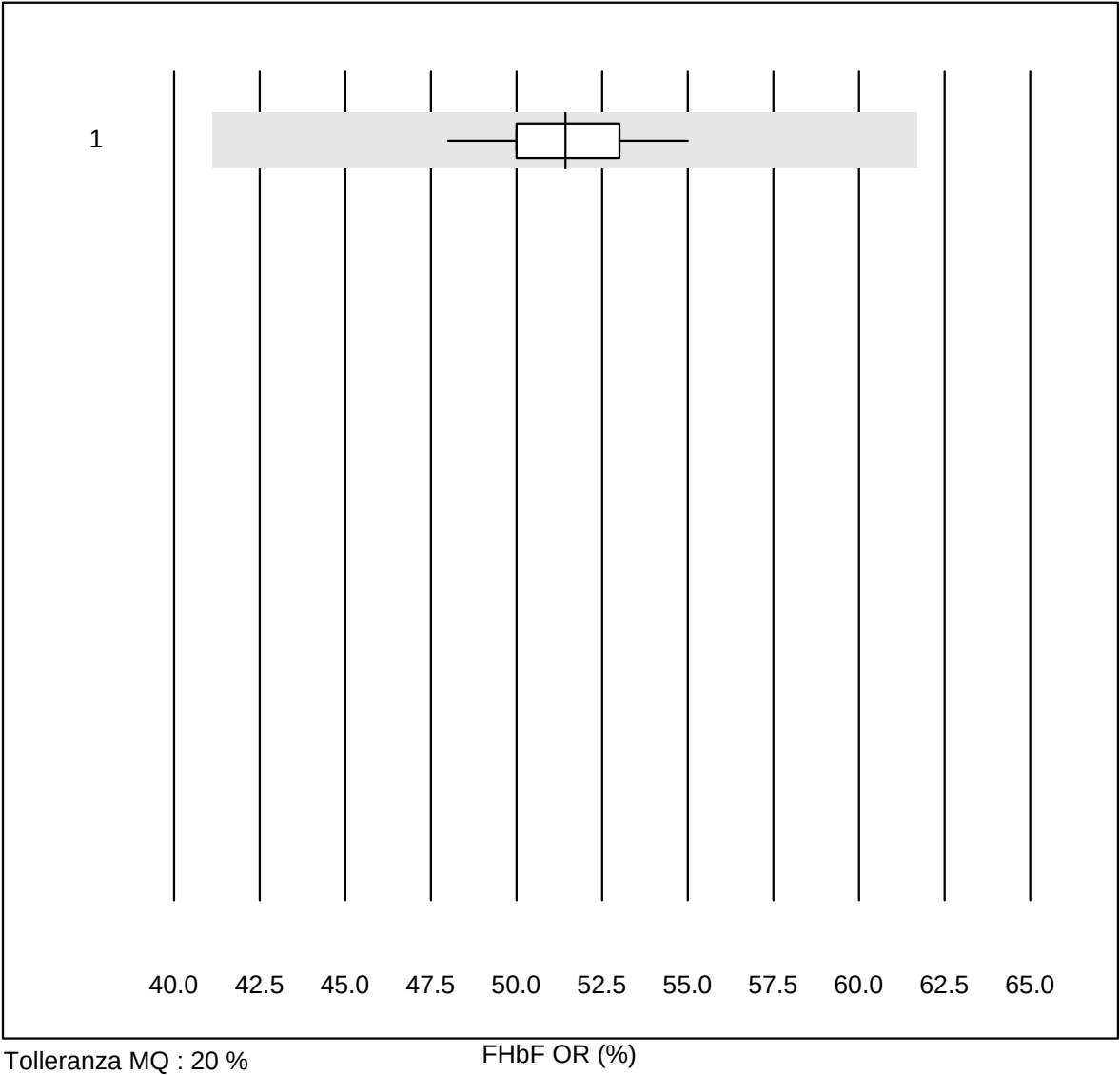

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ABL90 FLEX / PLUS	38	100.0	0.0	0.0	51.421	3.0	e
Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)							

Bilirubina OR

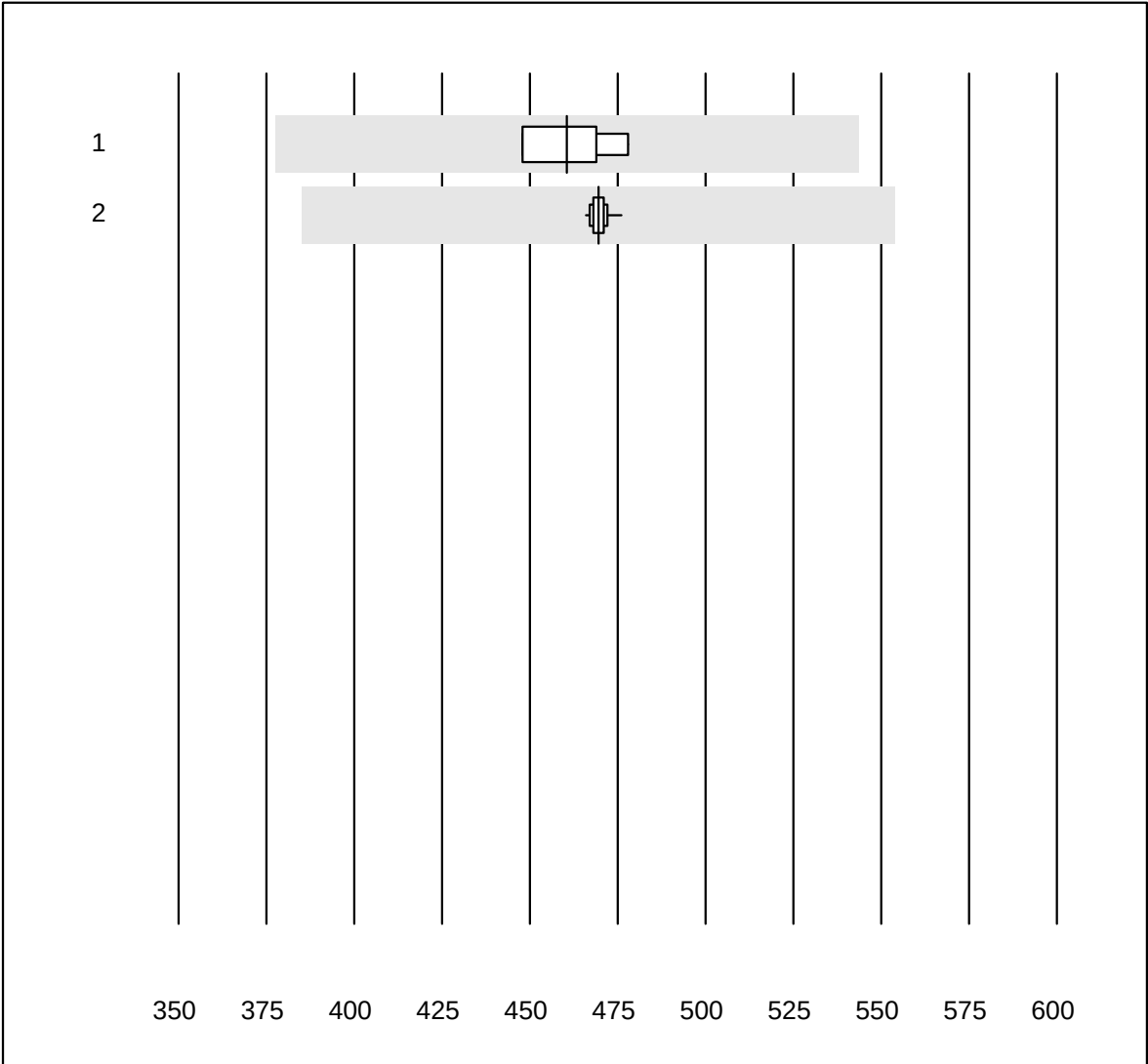


QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina OR (μmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	4	100.0	0.0	0.0	460.5	3.1	e
2	ABL90 FLEX / PLUS	33	100.0	0.0	0.0	469.5	0.4	e

Troponina I

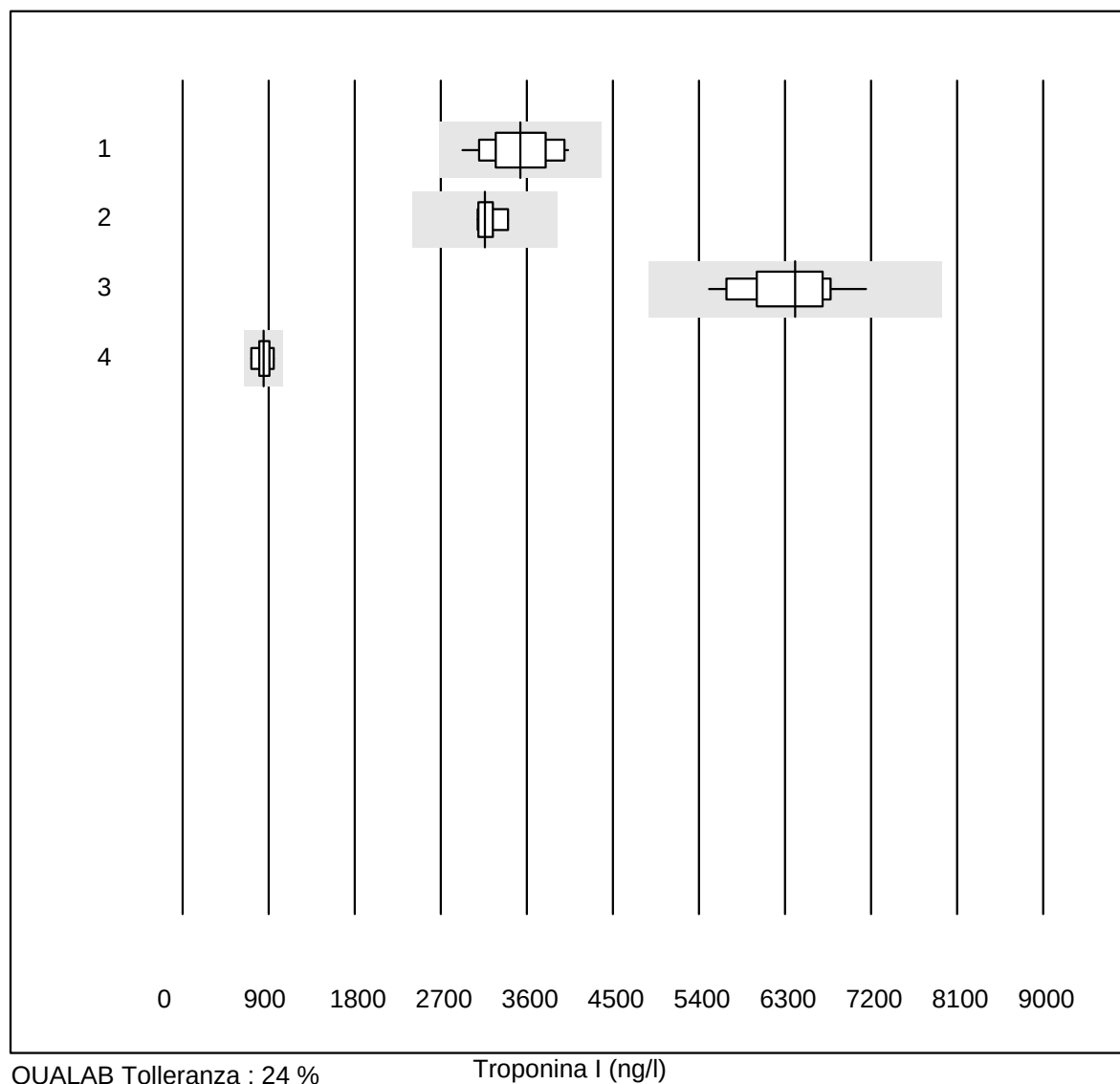


QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponina I (ng/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Pathfast	23	95.7	0.0	4.3	3532.9	9.6	e
2	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	3165.0	4.1	e
3	Vidas	14	100.0	0.0	0.0	6407.0	7.1	e
4	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	848.8	11.0	a

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Troponina T

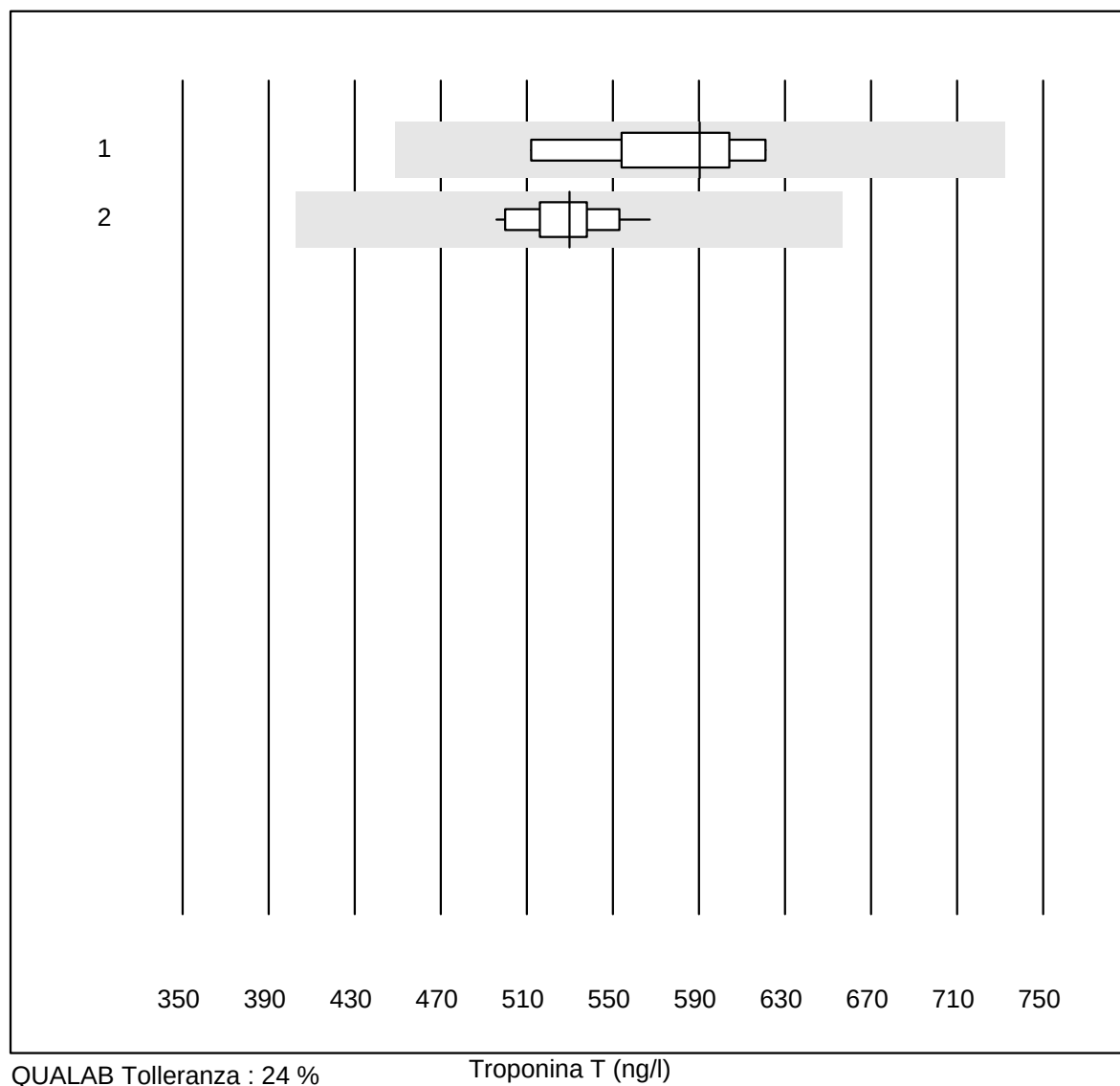


QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponina T (ng/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas hs	9	100.0	0.0	0.0	590.50	6.3	e
2	Cobas hs STAT	24	100.0	0.0	0.0	529.75	3.5	e

Mioglobina

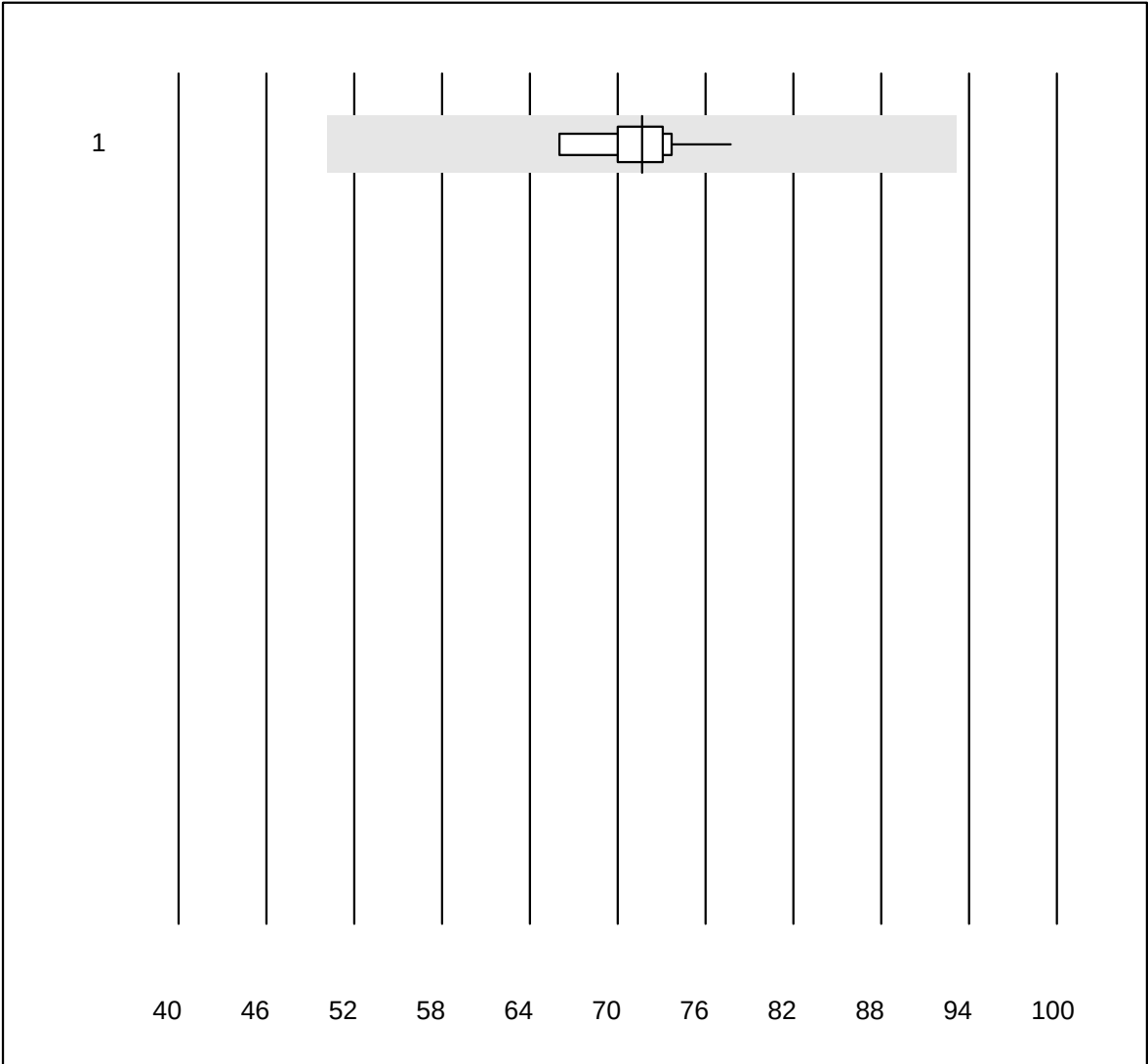


QUALAB Tolleranza : 30 %

Mioglobina (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	71.6	4.4	e
6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								


CK-MB massa

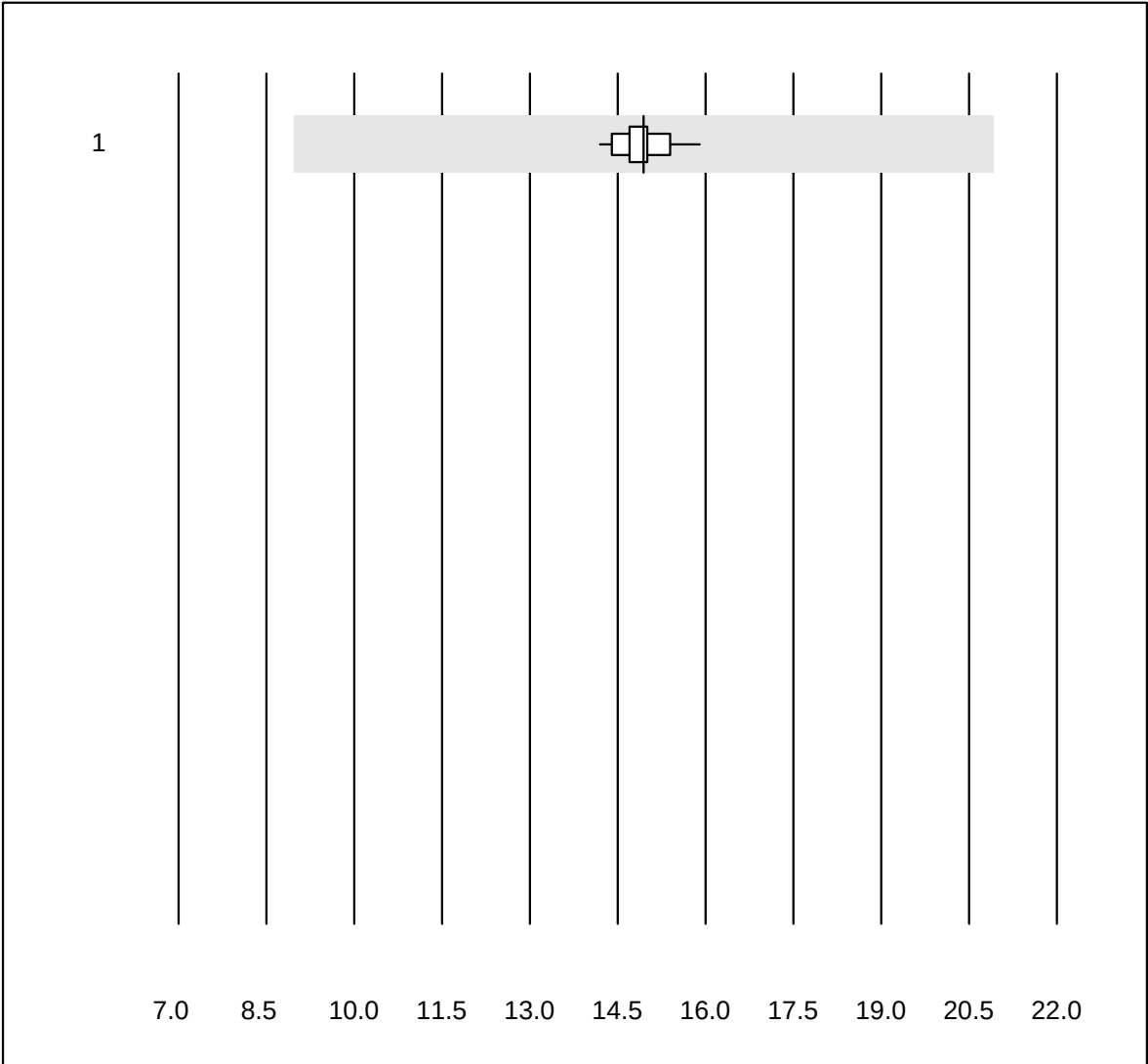

Tolleranza MQ : 40 % CK-MB massa (µg/l)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas E / Elecsys	12	100.0	0.0	0.0	14.9	3.0	e
7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


NT-proBNP

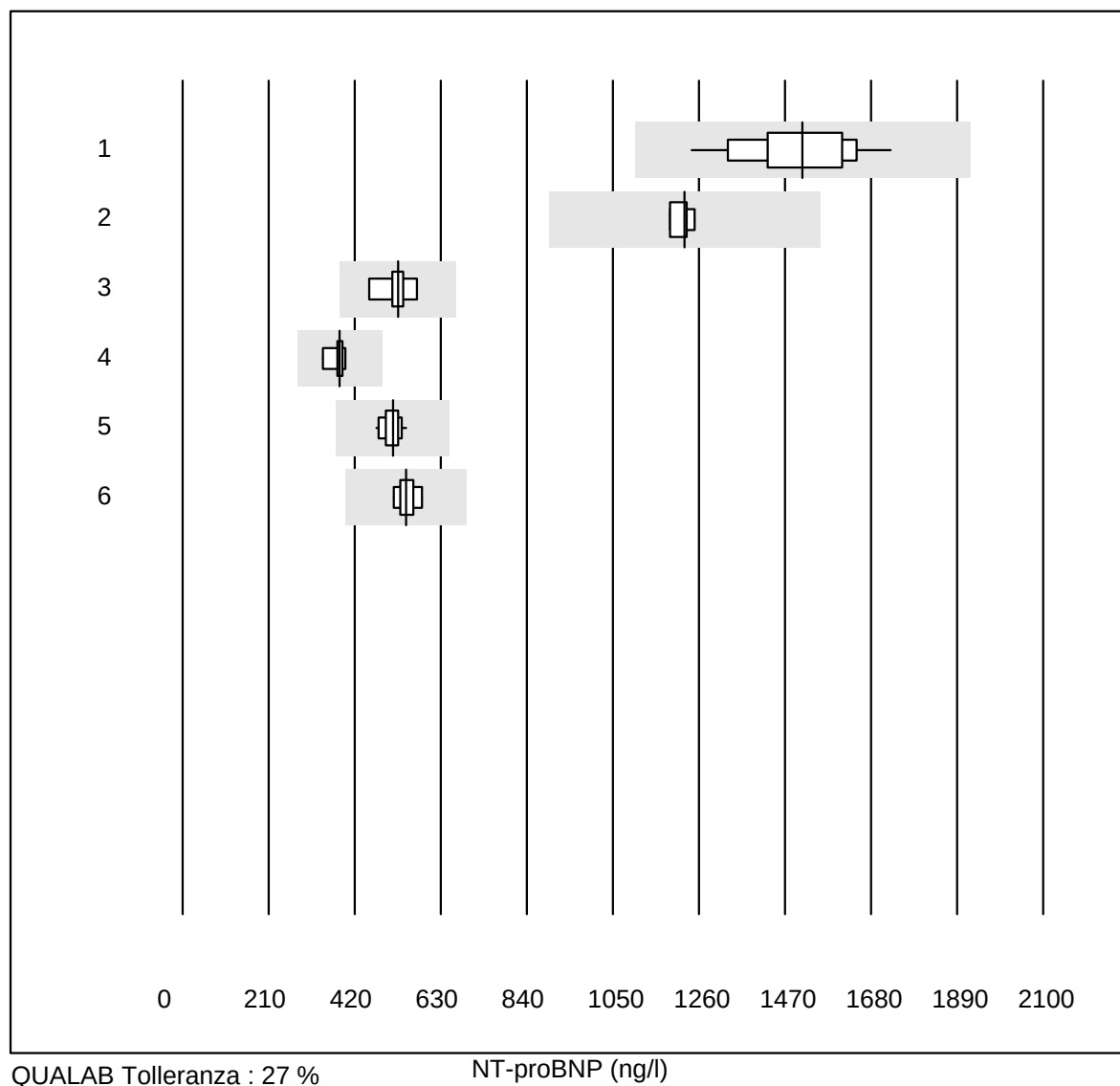

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Pathfast	17	94.1	0.0	5.9	1513.0	8.4	e
2 AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	1225.0	2.0	e
3 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	525.5	6.6	e
4 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	383.5	5.1	e
5 Cobas E / Elecsys	28	100.0	0.0	0.0	513.1	3.9	e
6 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	546.0	4.9	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

TSH

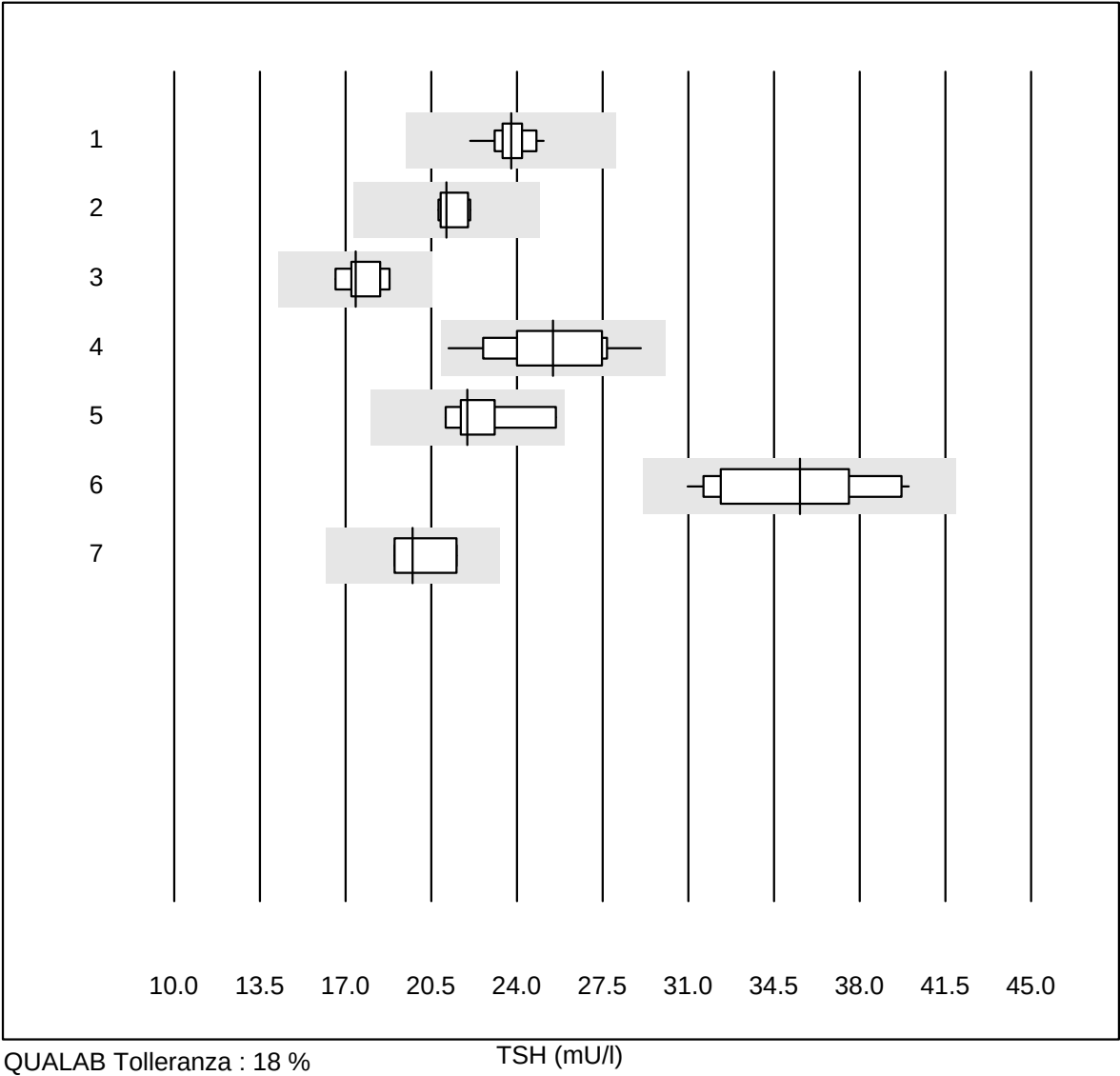


QUALAB Tolleranza : 18 %

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	34	100.0	0.0	0.0	23.76	2.8	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	21.11	2.9	e
3	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	17.41	4.6	e
4	VIDAS	15	100.0	0.0	0.0	25.46	8.2	e
5	Dimension	5	100.0	0.0	0.0	21.98	7.8	e*
6	AFIAS	15	100.0	0.0	0.0	35.54	8.4	e*
7	altri metodi	4	75.0	0.0	25.0	19.75	6.3	a


3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

T4

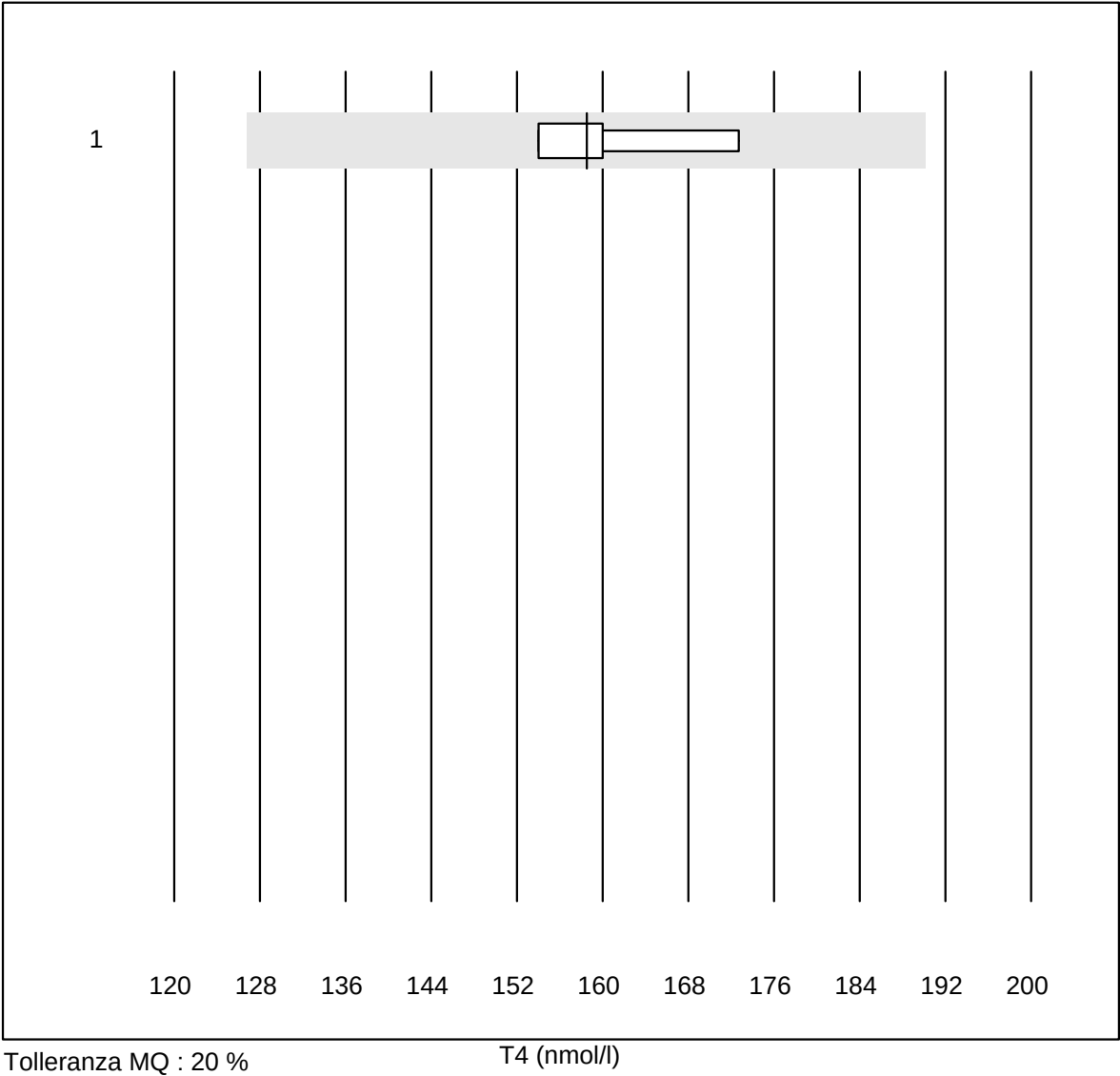

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	159	5.1	e*
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

FT3

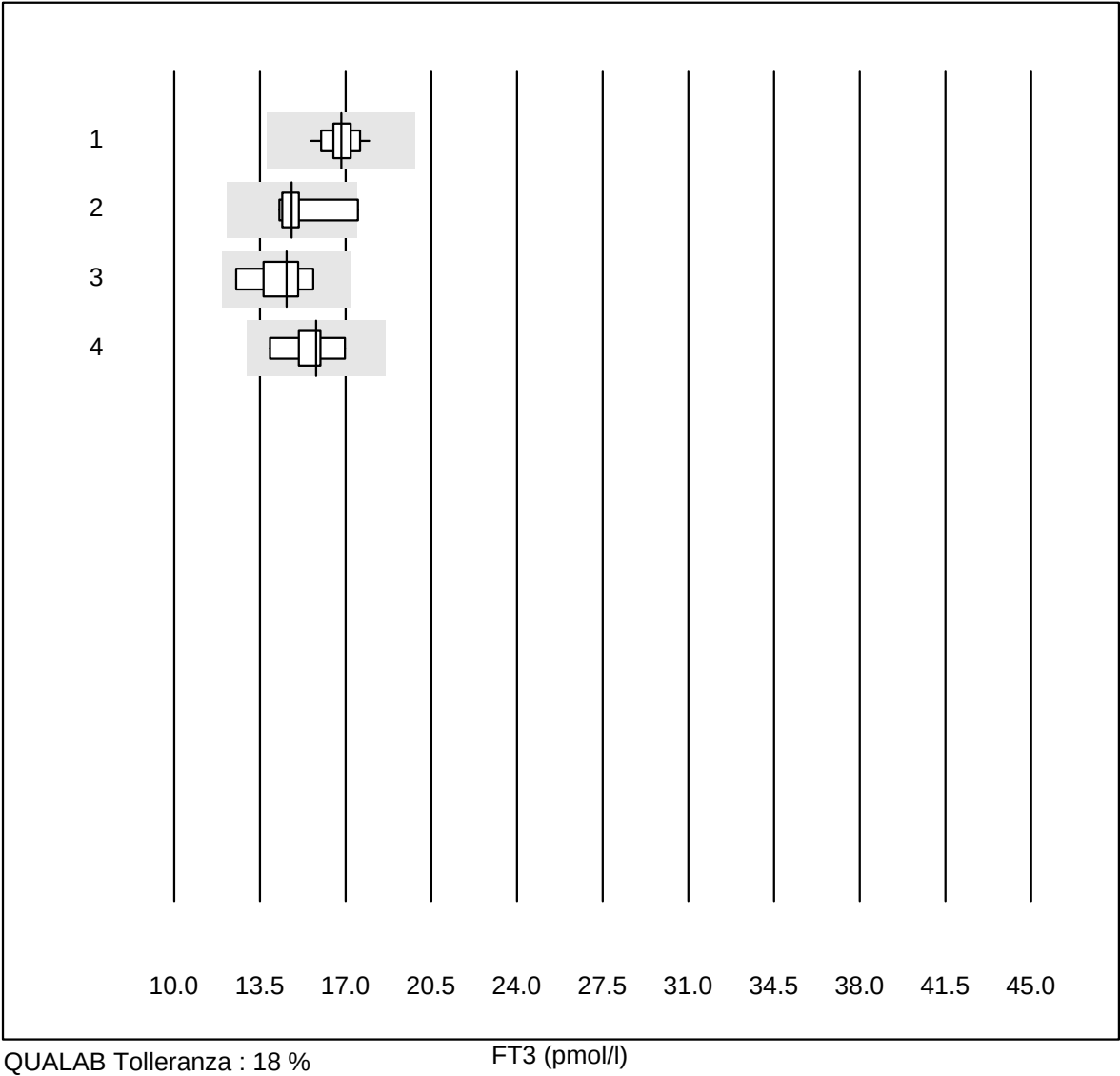


QUALAB Tolleranza : 18 %

FT3 (pmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	29	100.0	0.0	0.0	16.8	3.5	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	5	80.0	20.0	0.0	14.8	8.6	e*
3	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	14.6	7.8	e*
4	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	15.8	6.2	e*

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

FT4

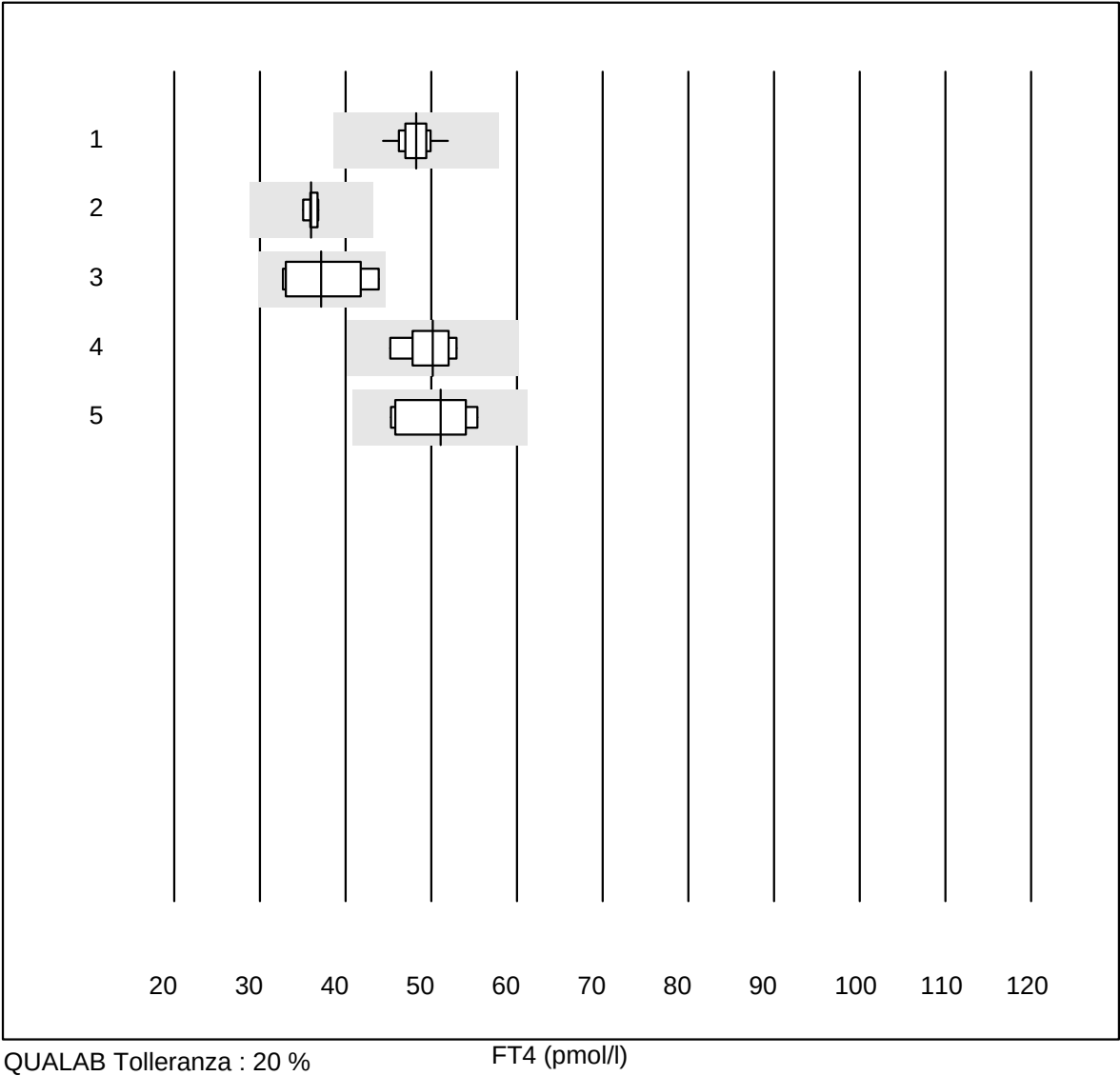


QUALAB Tolleranza : 20 %

FT4 (pmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	30	100.0	0.0	0.0	48.2	3.6	e
2	ADVIA Centaur XP	5	100.0	0.0	0.0	36.0	2.0	e
3	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	37.2	12.0	a
4	VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	50.1	5.2	e
5	altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	51.1	8.4	e*

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Testosterone

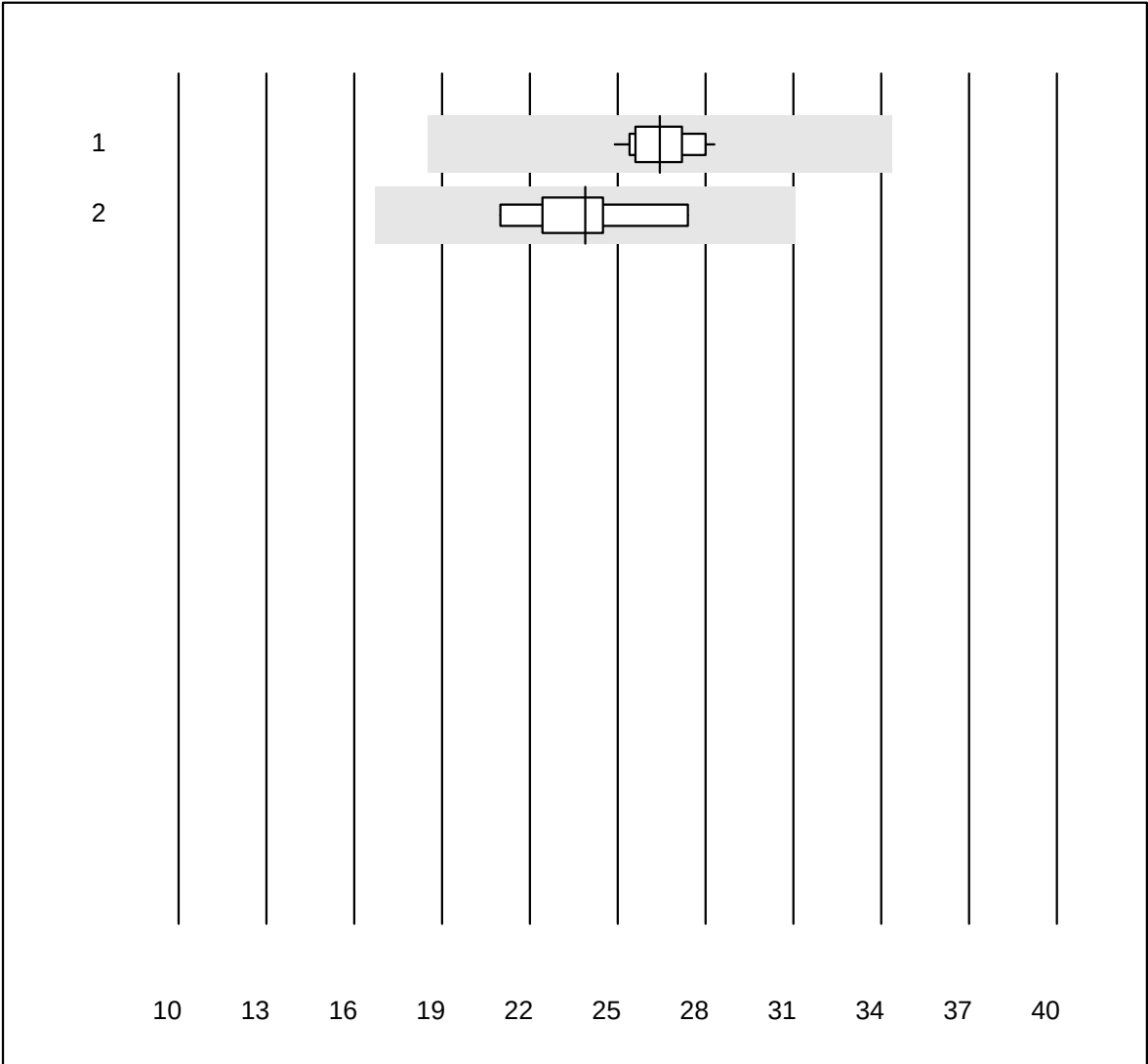


QUALAB Tolleranza : 30 %

Testosterone (nmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	26.4	3.8	e
2	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	23.9	9.1	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Estradiolo

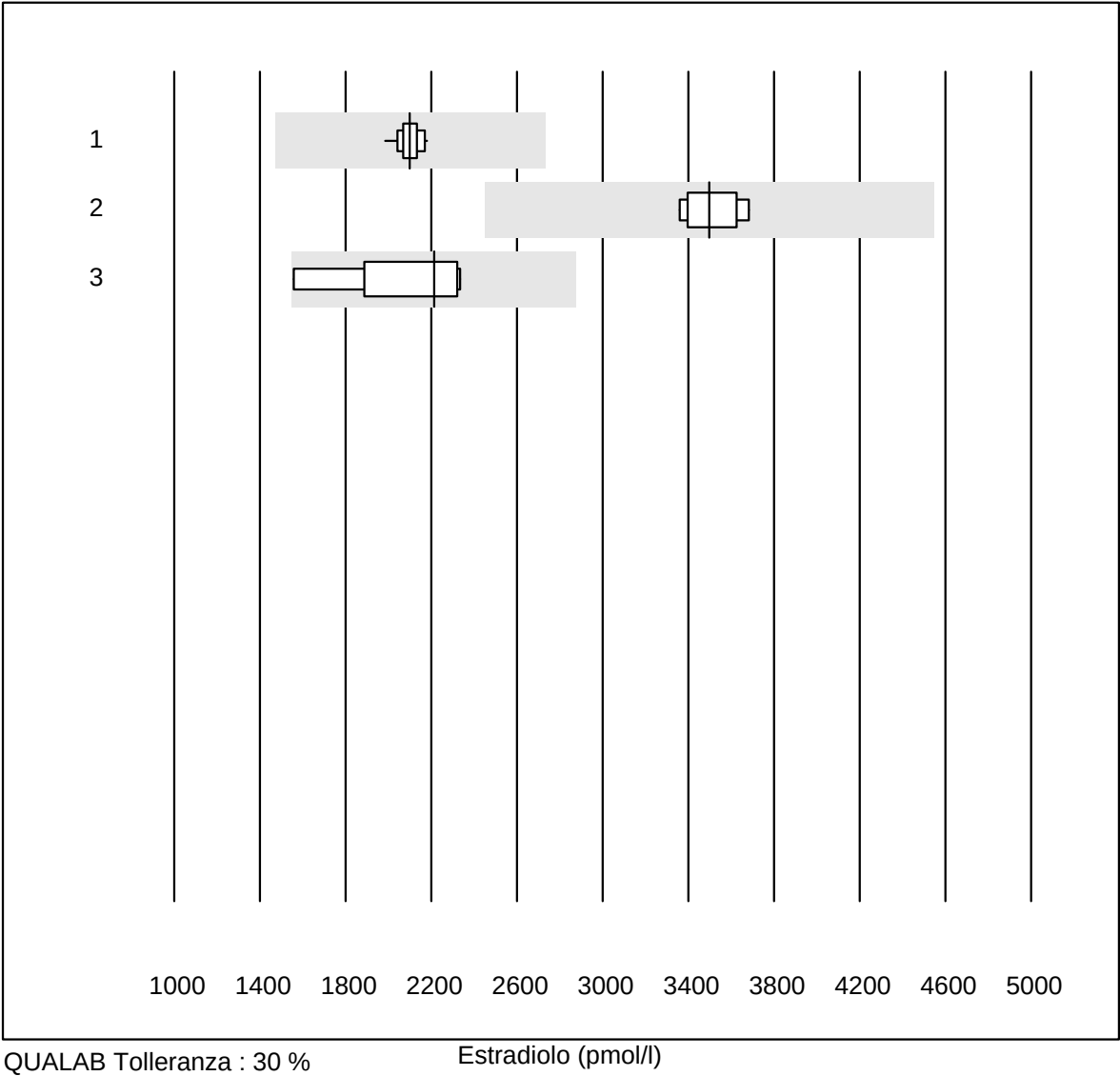


QUALAB Tolleranza : 30 %

Estradiolo (pmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	2100	2.5	e
2	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	3497	3.8	e
3	altri metodi	7	100.0	0.0	0.0	2212	14.1	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

SHBG

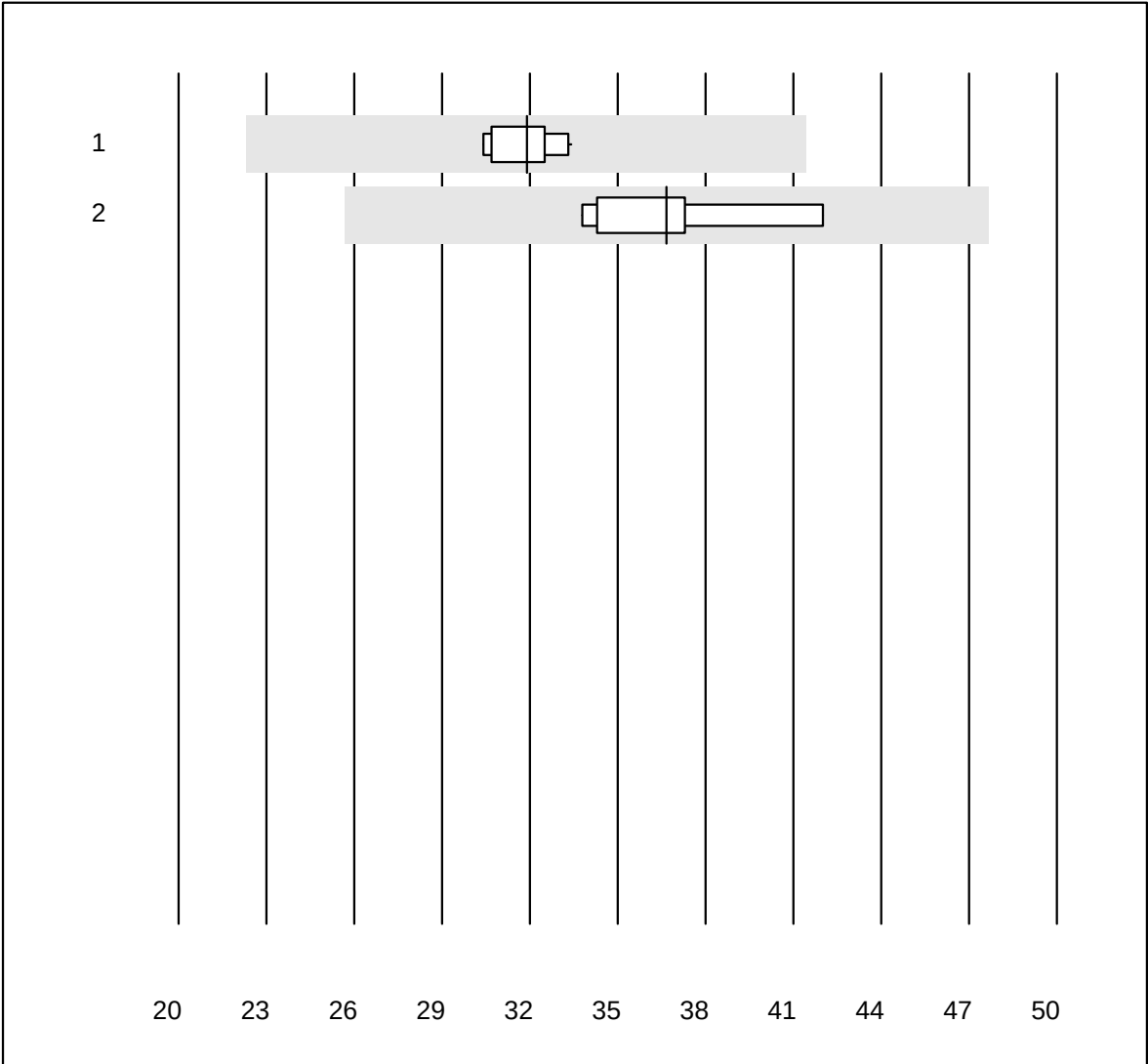


Tolleranza MQ : 30 %

SHBG (nmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	31.9	3.2	e
2	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	36.7	8.9	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Cortisolo

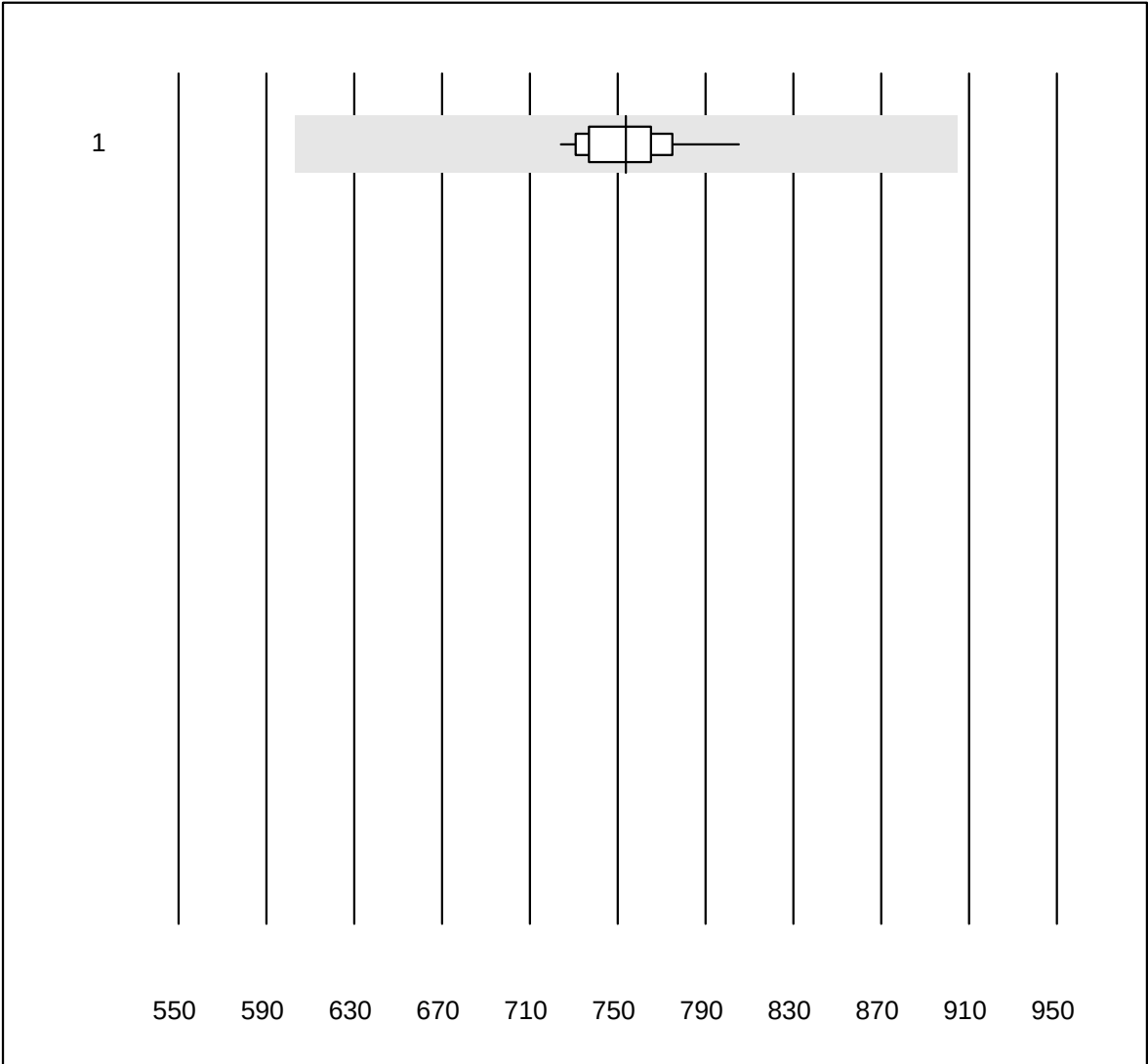


QUALAB Tolleranza : 20 %

Cortisolo (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	22	100.0	0.0	0.0	754	2.7	e
6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)							

Progesterone

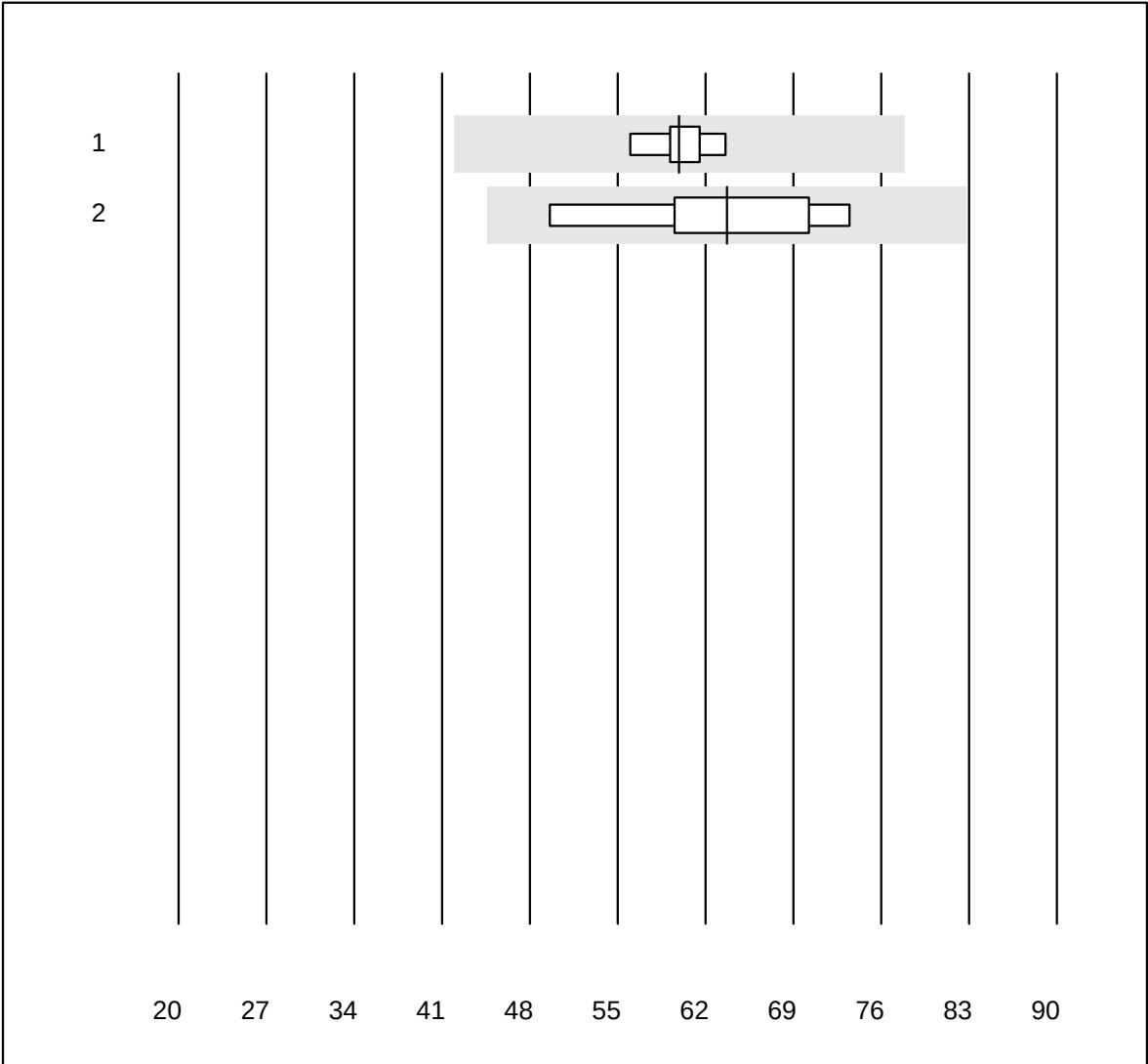


Tolleranza MQ : 30 %

Progesterone (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	9	100.0	0.0	0.0	59.9	4.1	e
2 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	63.7	13.7	e*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

DHEAS

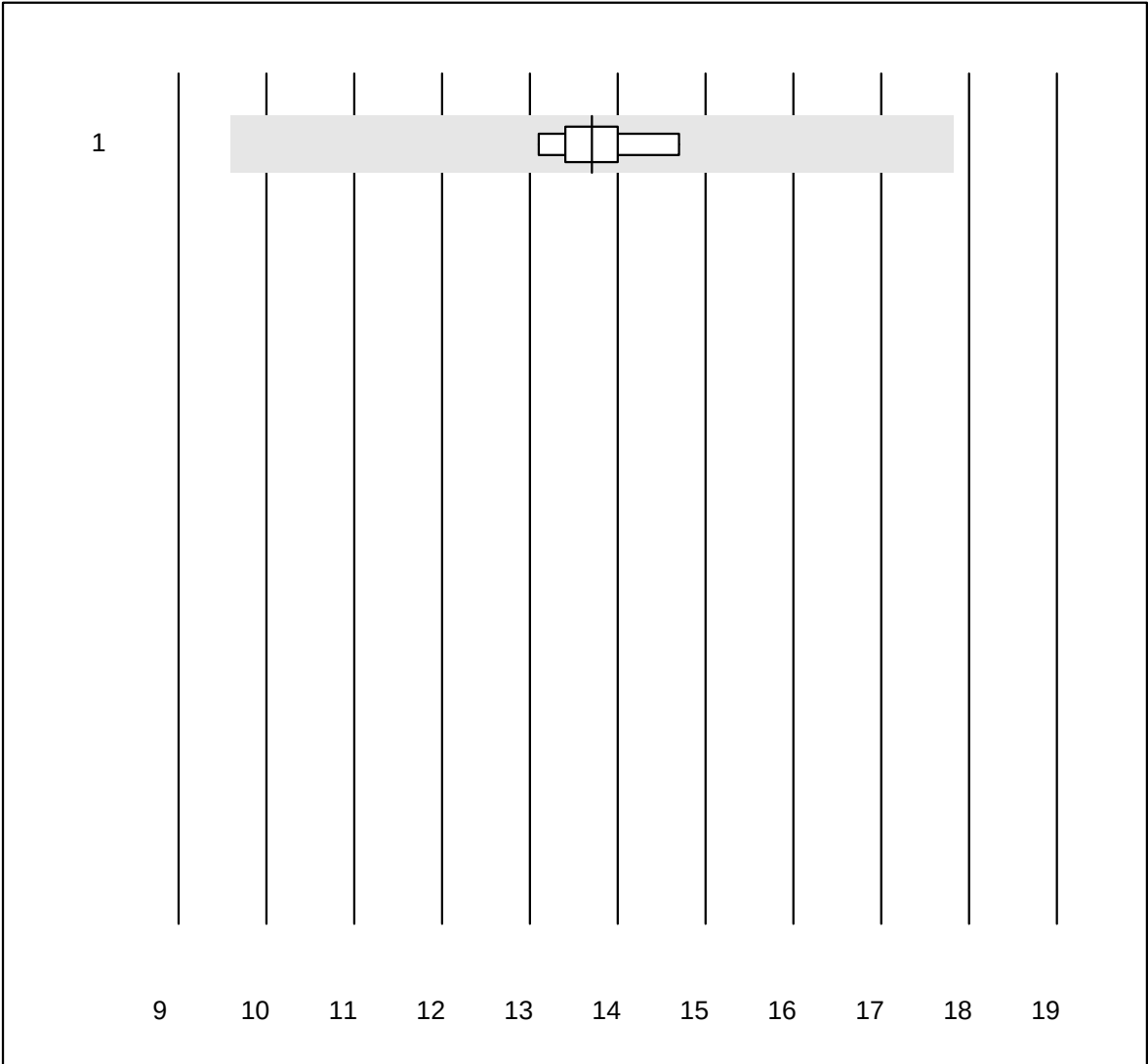


Tolleranza MQ : 30 %

DHEAS (μmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	13	100.0	0.0	0.0	13.71	3.8	e
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)								

Ormone luteinizzante

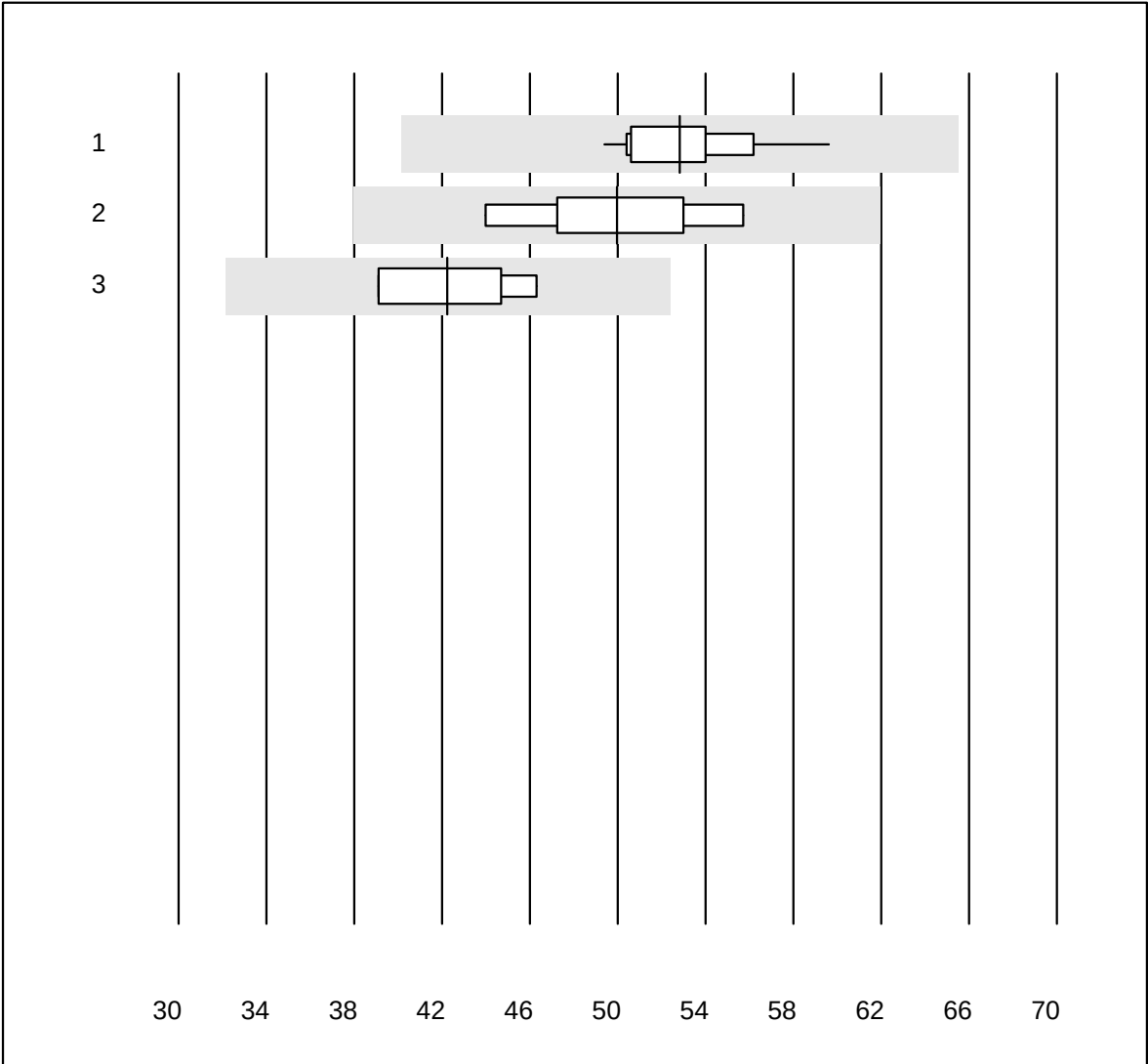


QUALAB Tolleranza : 24 %

Ormone luteinizzante (U/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	52.8	5.2	e
2	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	50.0	7.8	e*
3	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	42.3	8.4	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ormone follicolo-stimolante

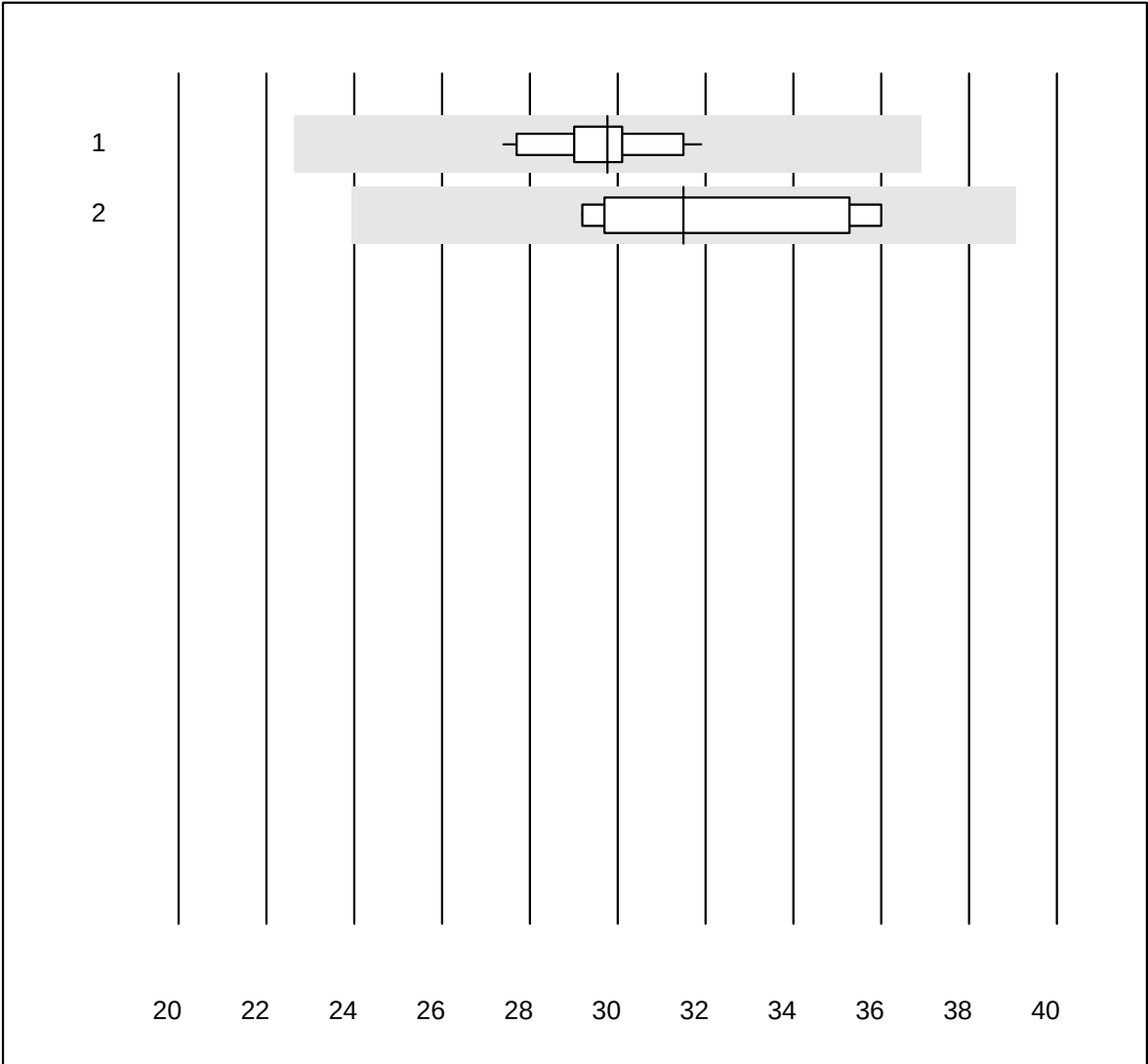


QUALAB Tolleranza : 24 %

Ormone follicolo-stimolante (U/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	29.8	4.4	e
2	ADVIA Centaur XP/CP	7	100.0	0.0	0.0	31.5	8.6	e*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Prolattina (PRL)

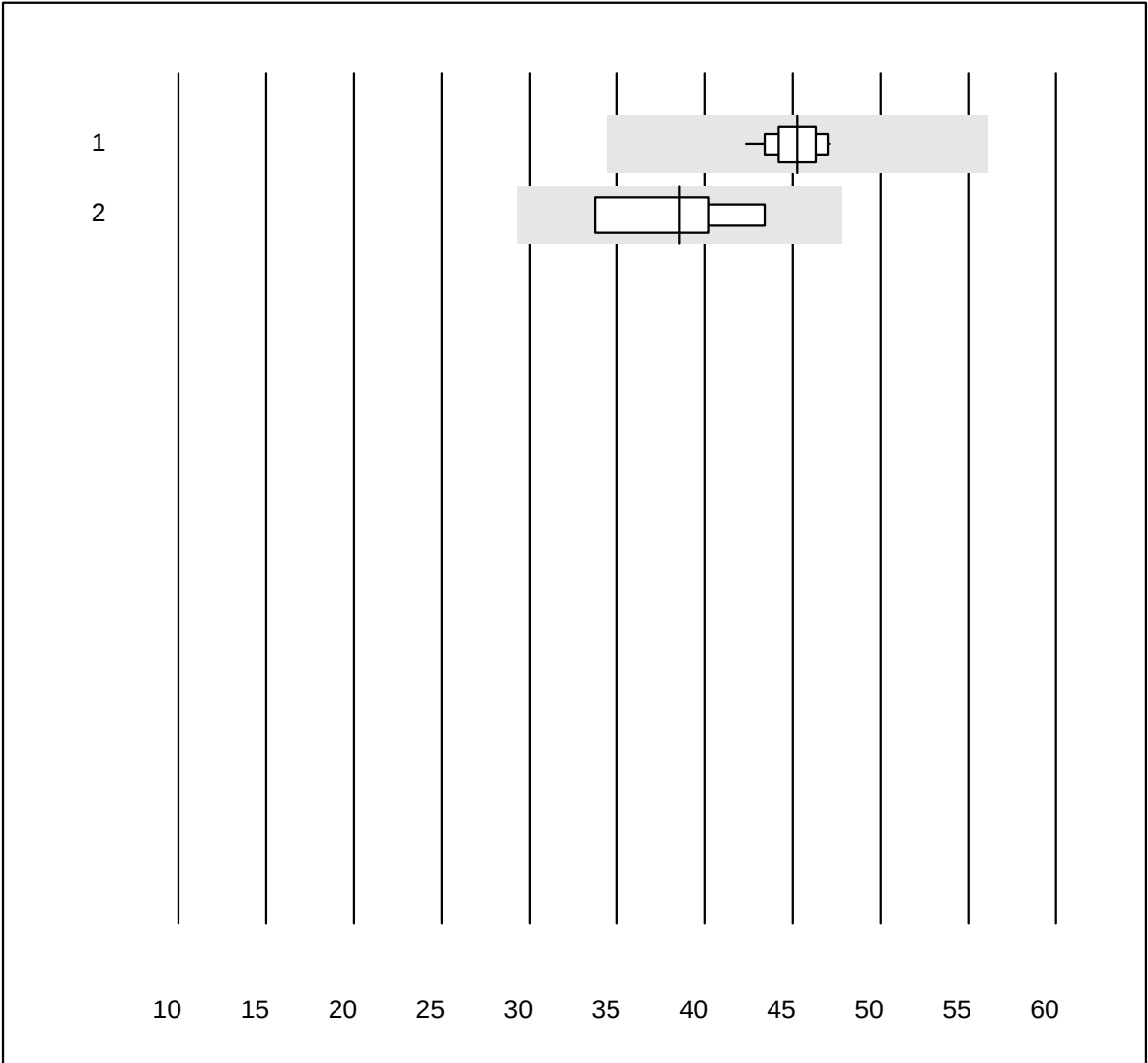


QUALAB Tolleranza : 24 %

Prolattina (PRL) (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas/Roche	15	100.0	0.0	0.0	45.3	3.1	e
2	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	38.5	10.9	e*


3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Insulina

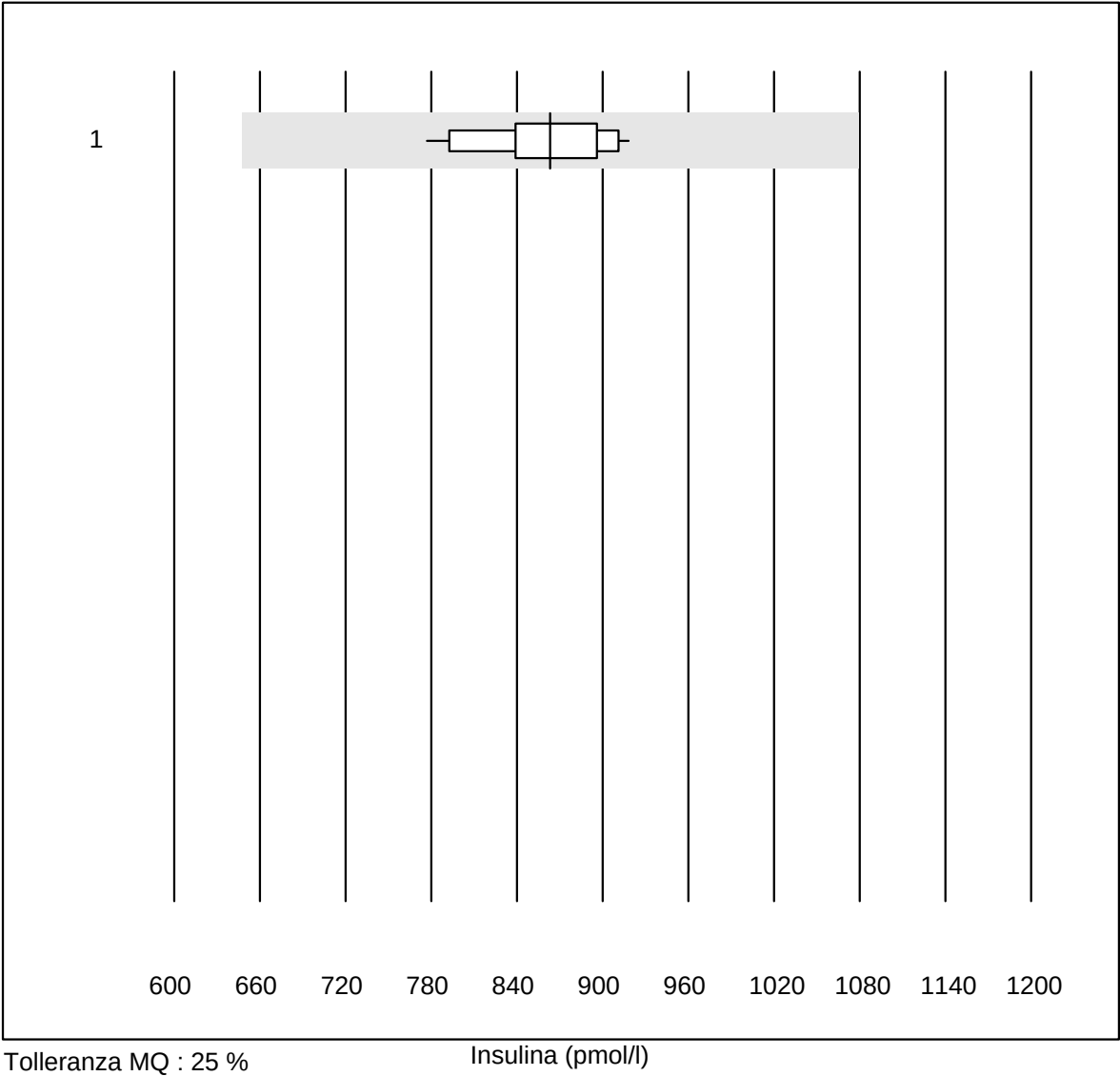

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	18	100.0	0.0	0.0	863	4.7	e
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

HGH

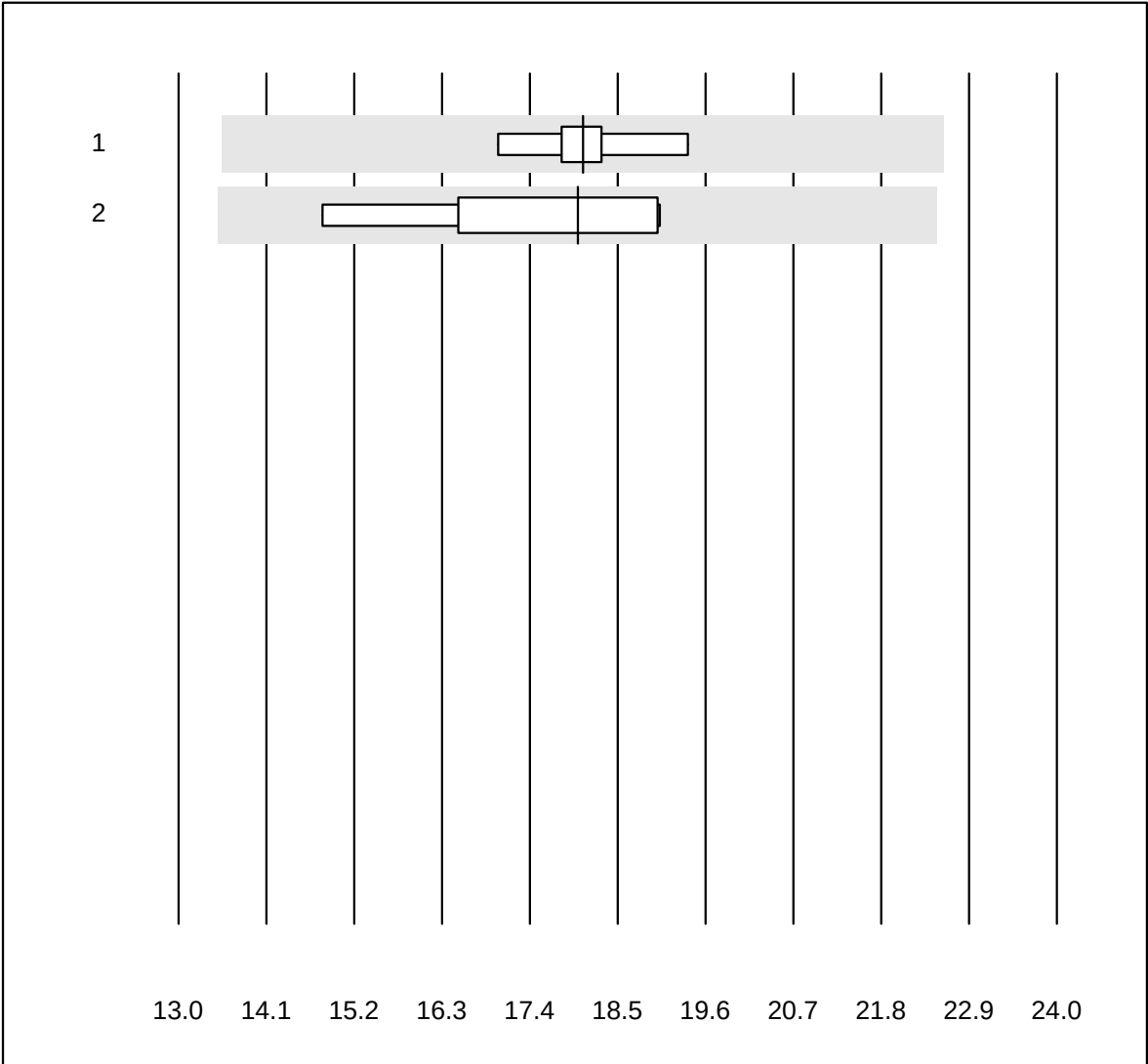


Tolleranza MQ : 25 %

HGH (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	6	100.0	0.0	0.0	18.07	4.3	e
2 Liaison	5	100.0	0.0	0.0	18.00	10.4	e*

Testosterone libero

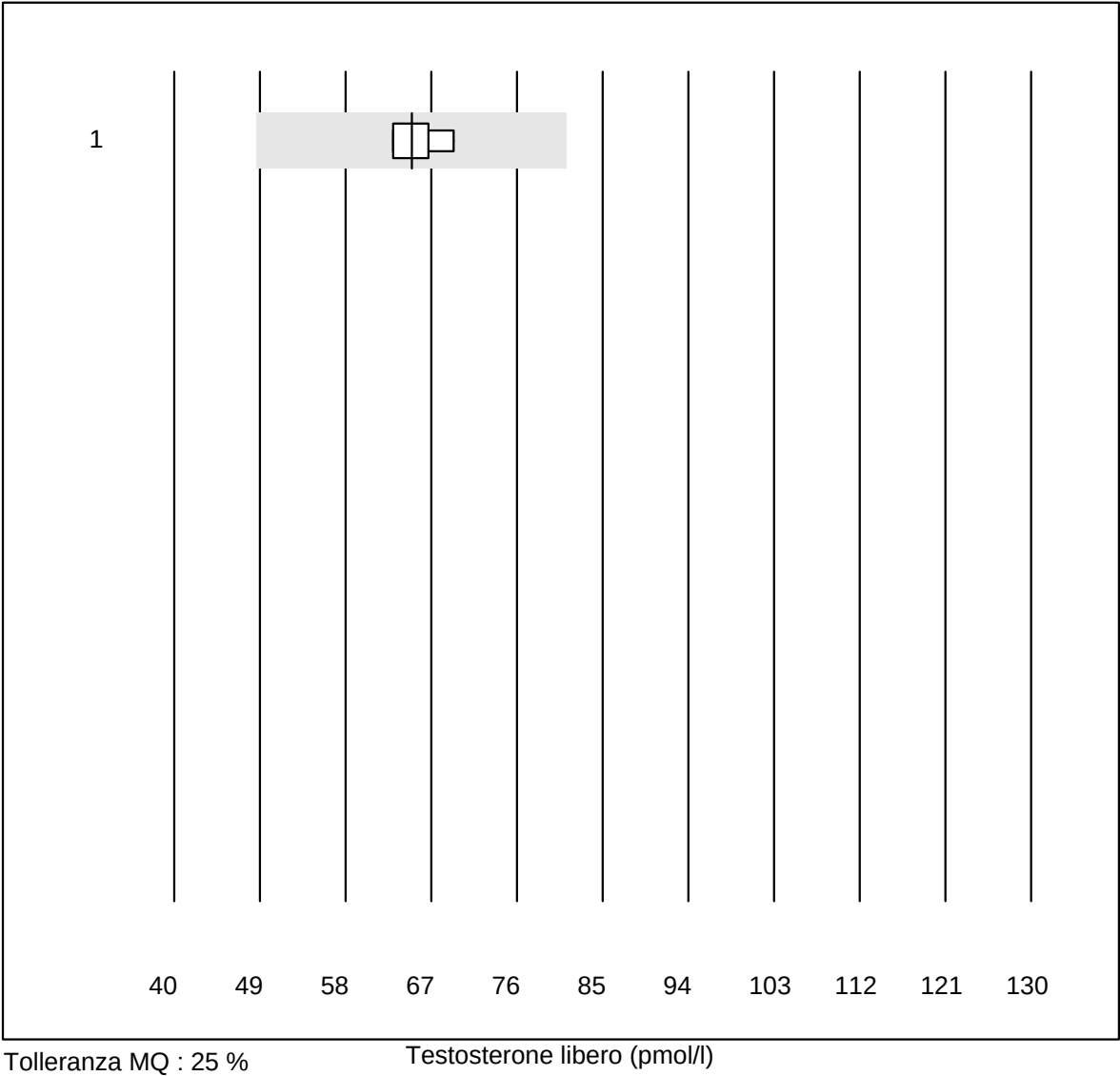


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IDS	4	100.0	0.0	0.0	65.0	4.6	e
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Androstendione

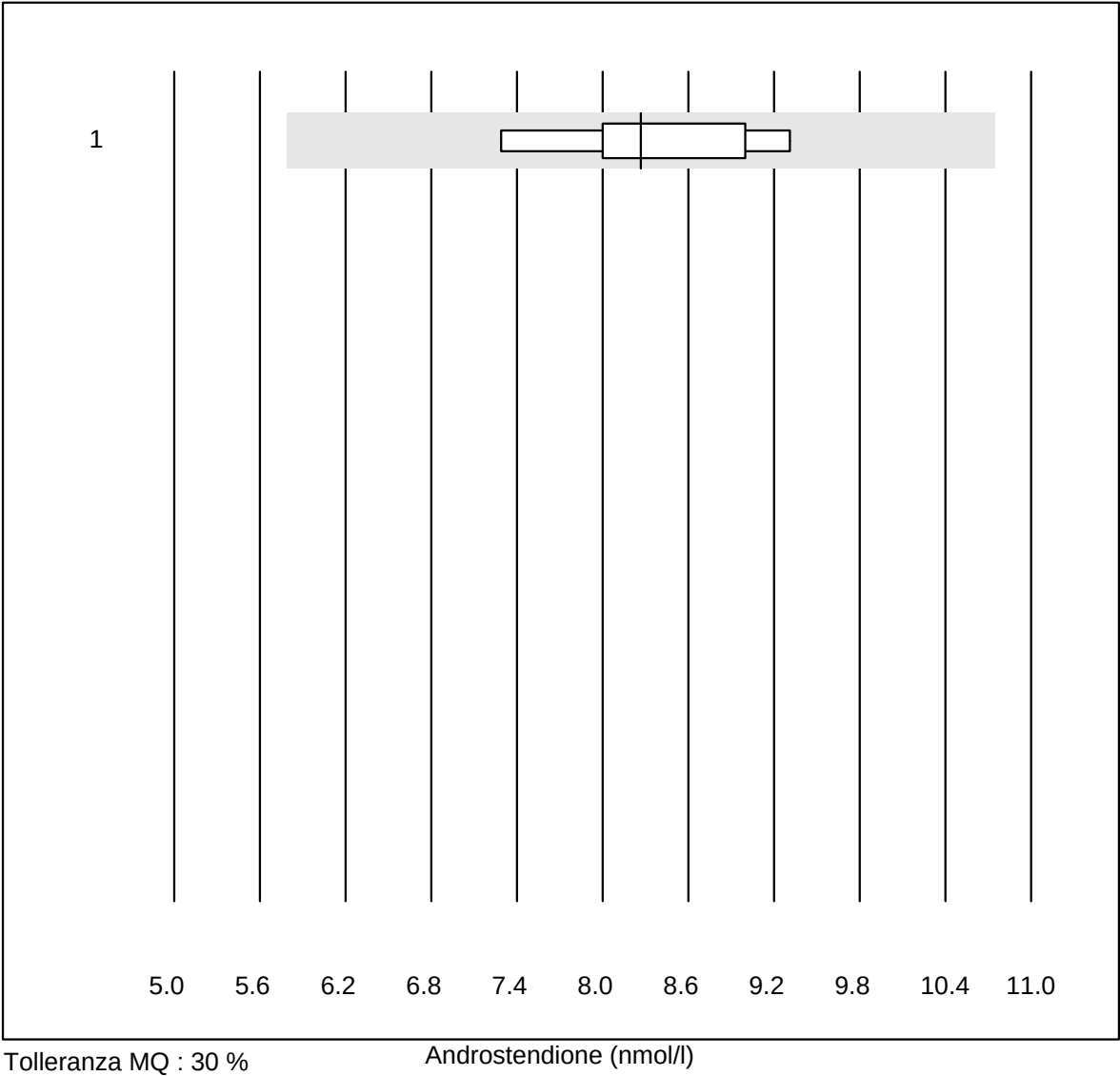

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	6	100.0	0.0	0.0	8.3	8.7	e

IGF-1

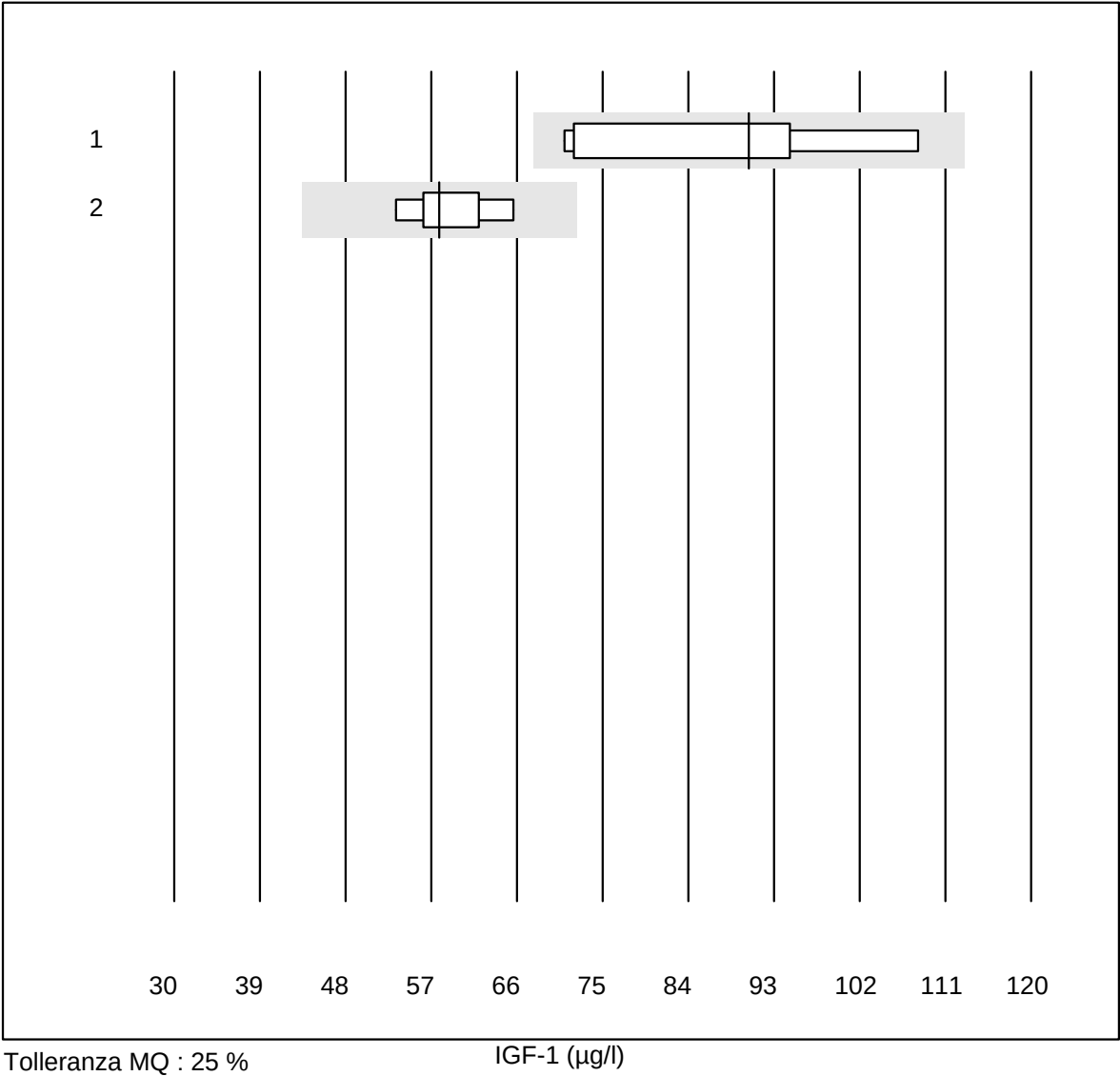


Tolleranza MQ : 25 %


IGF-1 (µg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Liaison	8	100.0	0.0	0.0	90	15.3	e*
2	altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	58	7.5	e*

Troponina T CR

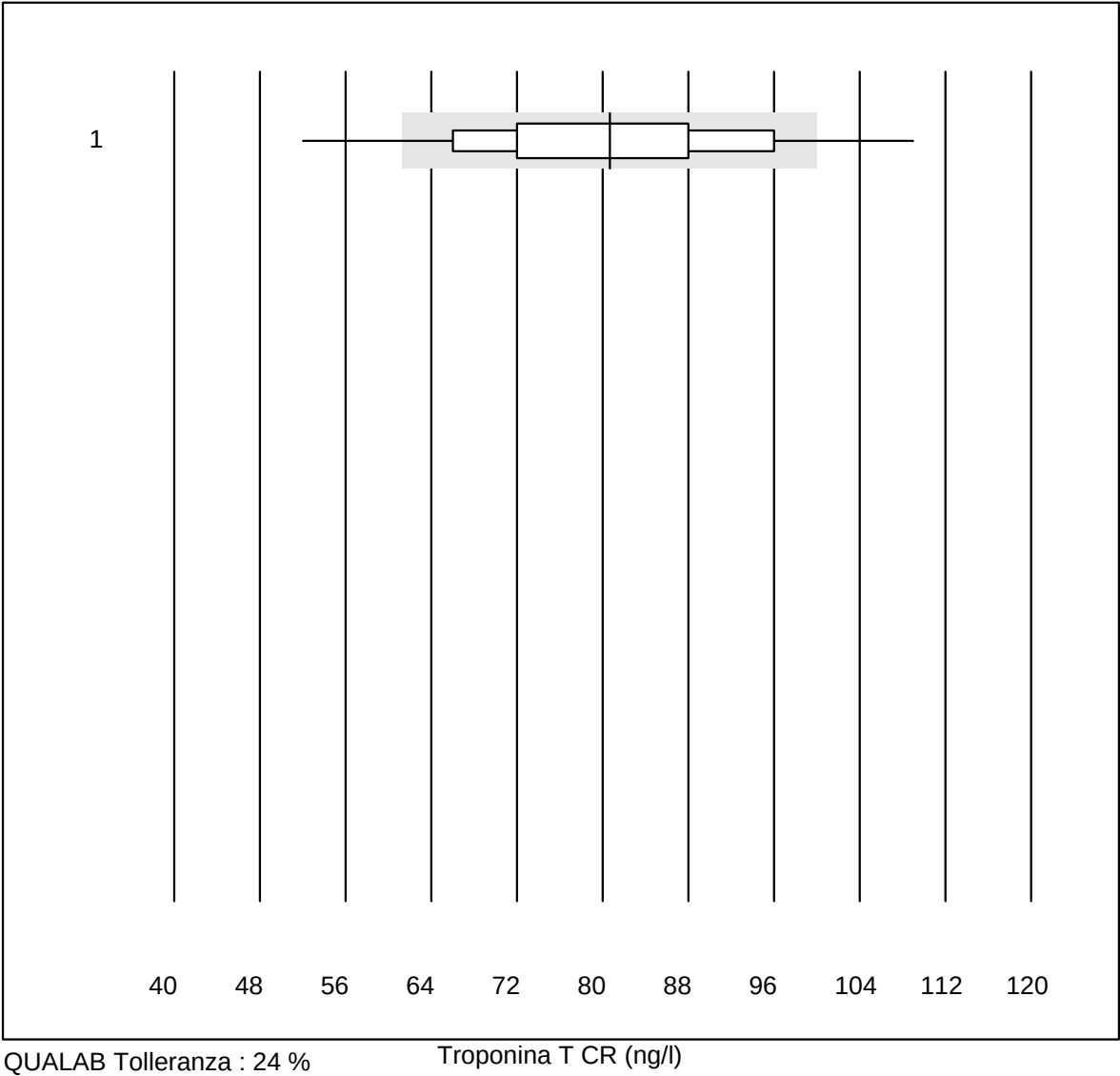

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas h 232	338	88.4	8.0	3.6	80.65	14.1	e

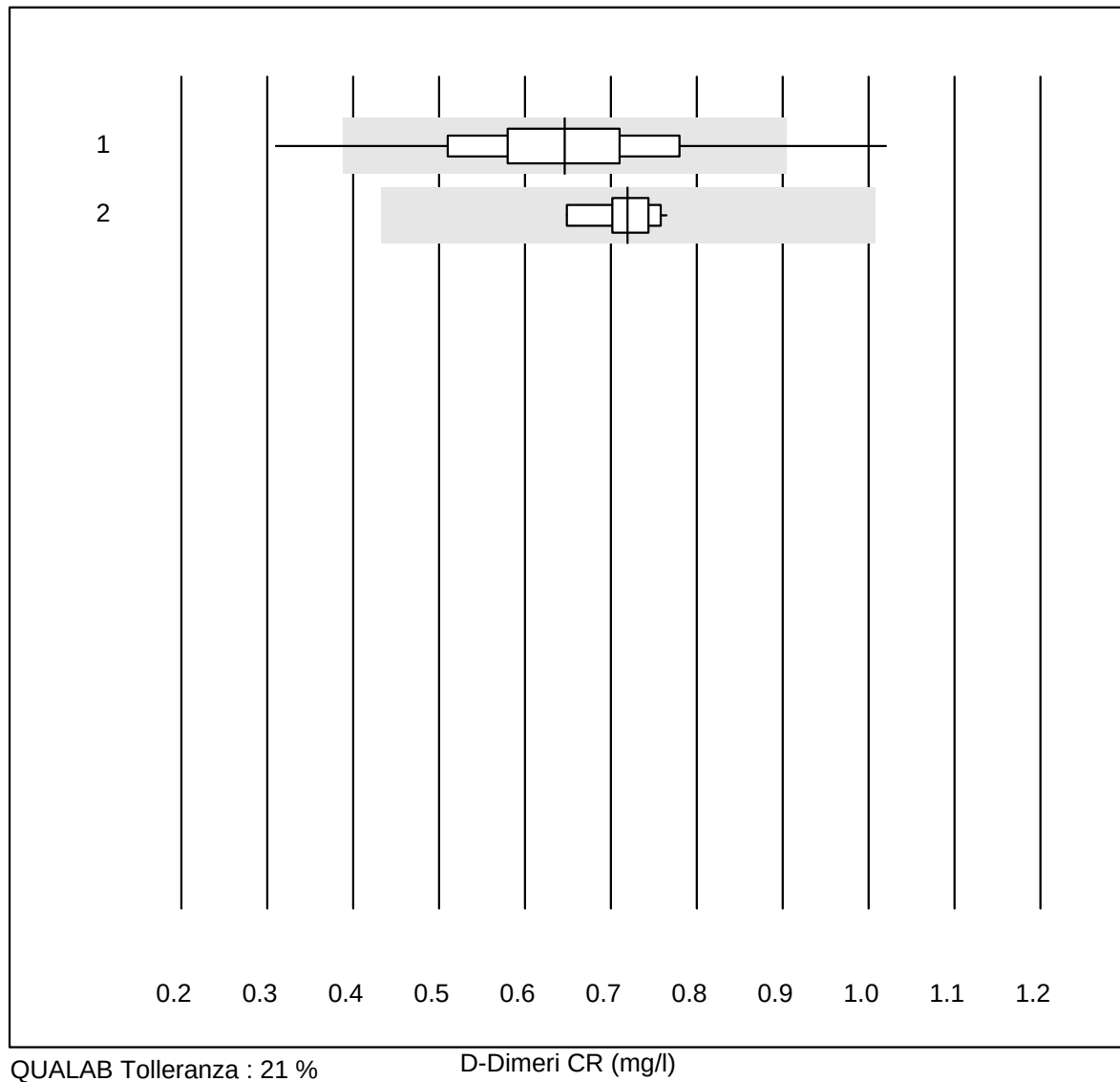
D-Dimeri CR

QUALAB Tolleranza : 21 %

D-Dimeri CR (mg/l)


No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas h 232	616	96.2	1.5	2.3	0.65	15.9	a
2	Lumira Dx	11	90.9	0.0	9.1	0.72	4.8	a

CKMB- K8

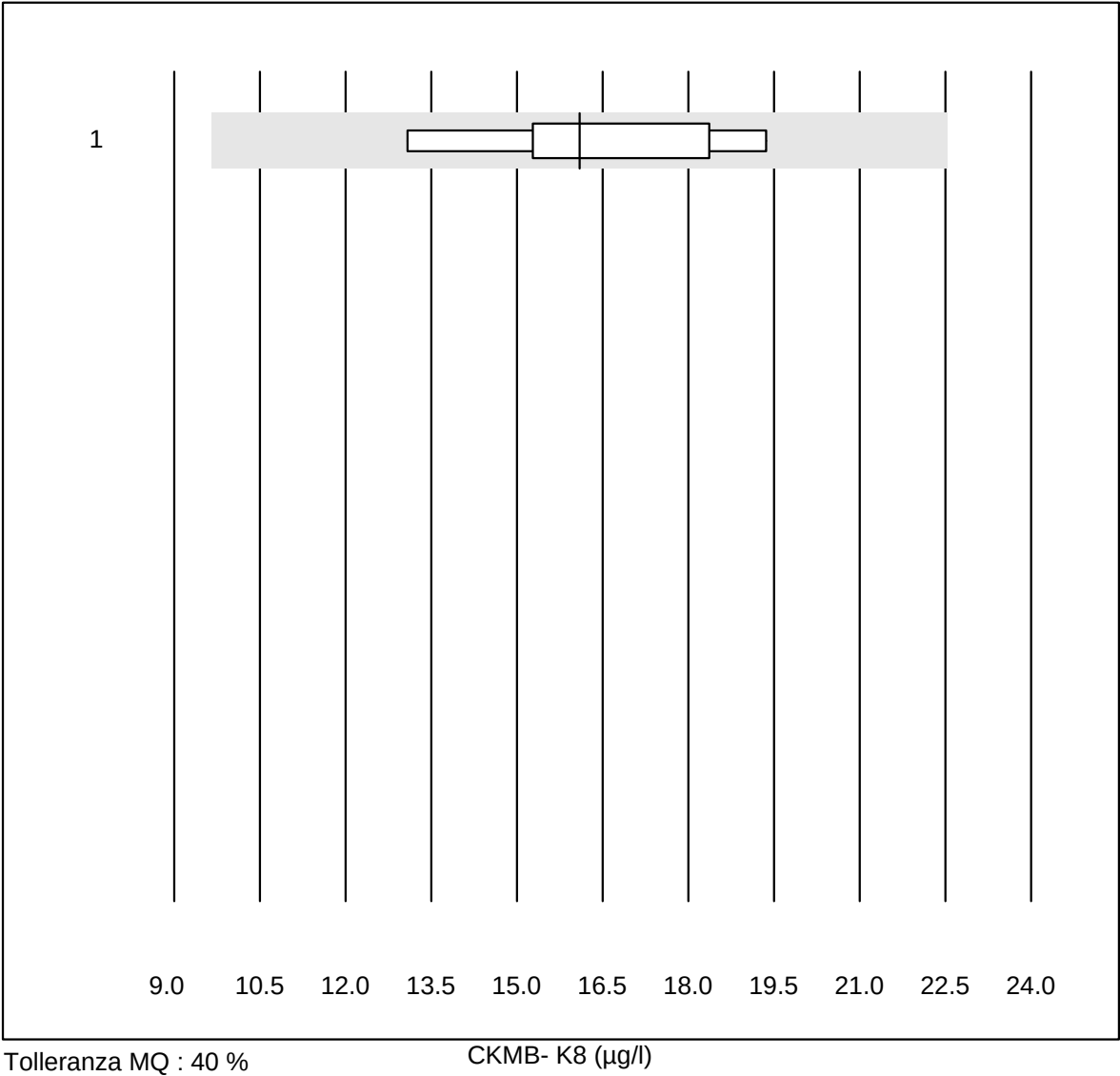

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas h 232	5	100.0	0.0	0.0	16.1	15.2	e*

NT-proBNP CR

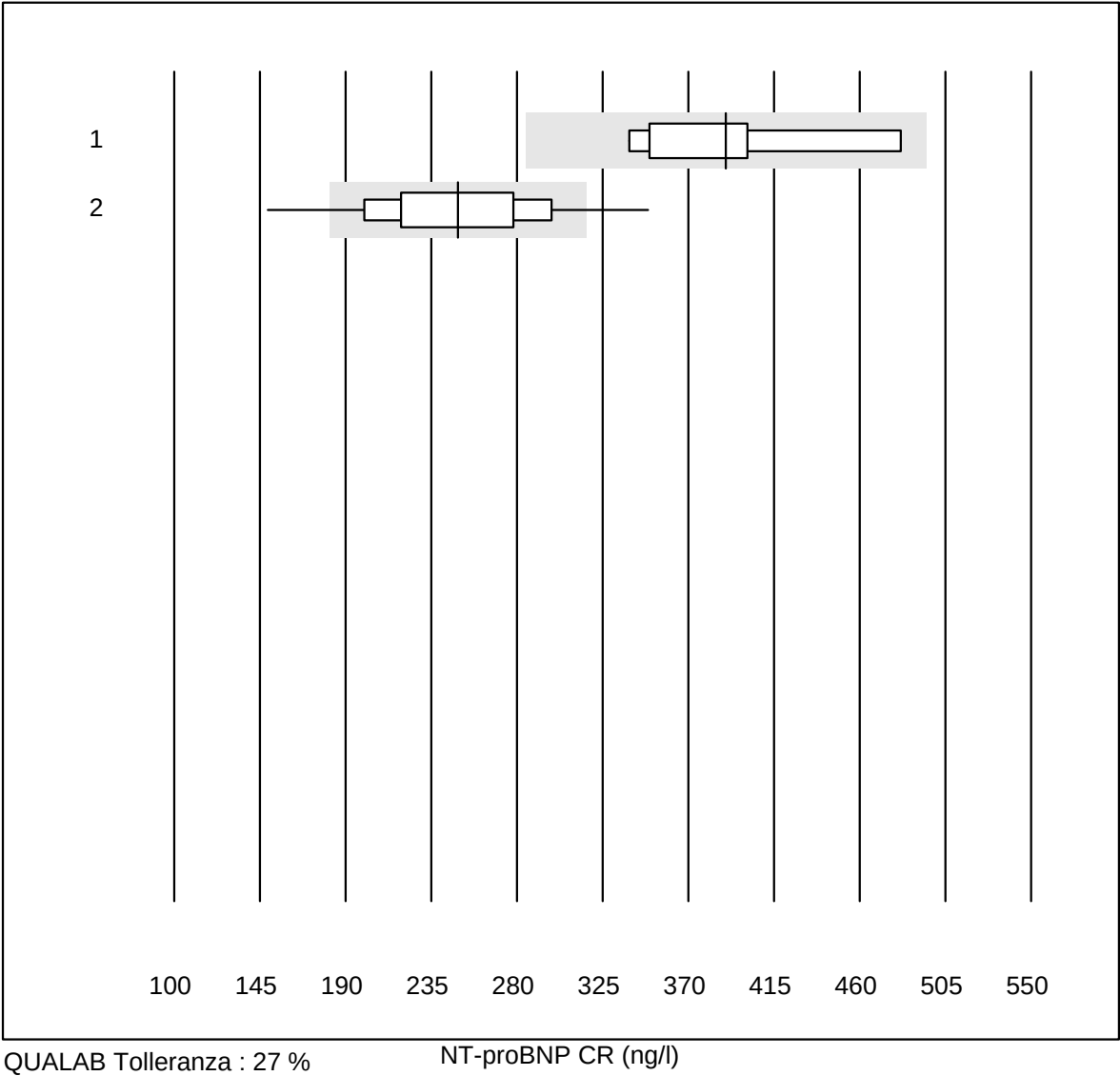


QUALAB Tolleranza : 27 %

NT-proBNP CR (ng/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Lumira Dx	10	80.0	0.0	20.0	390	11.4	e*
2	Cobas h 232	371	92.4	5.4	2.2	249	15.2	e

PCO2 CCA

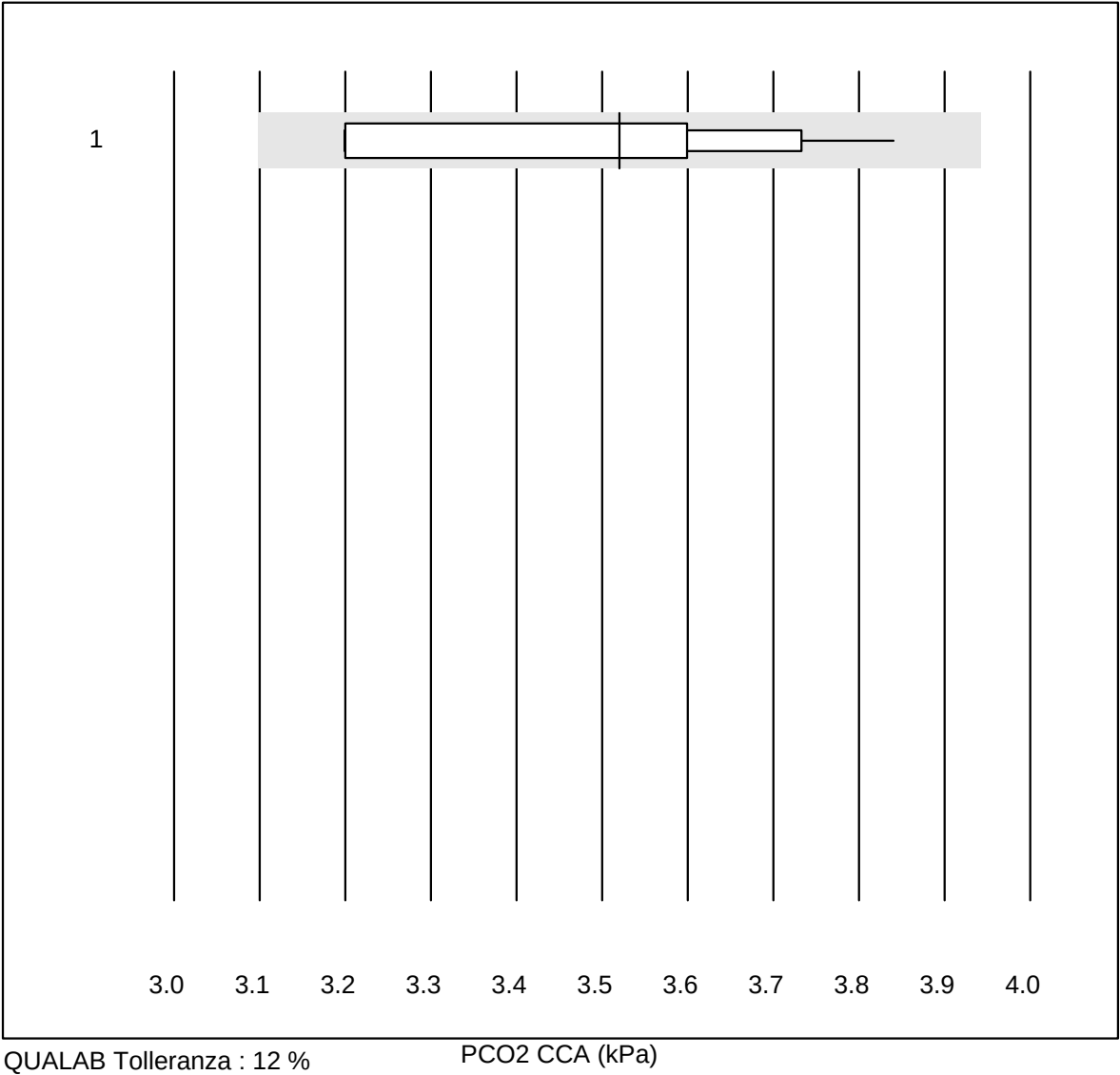


No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	11	90.9	0.0	9.1	3.52	7.0	a

PO2 CCA

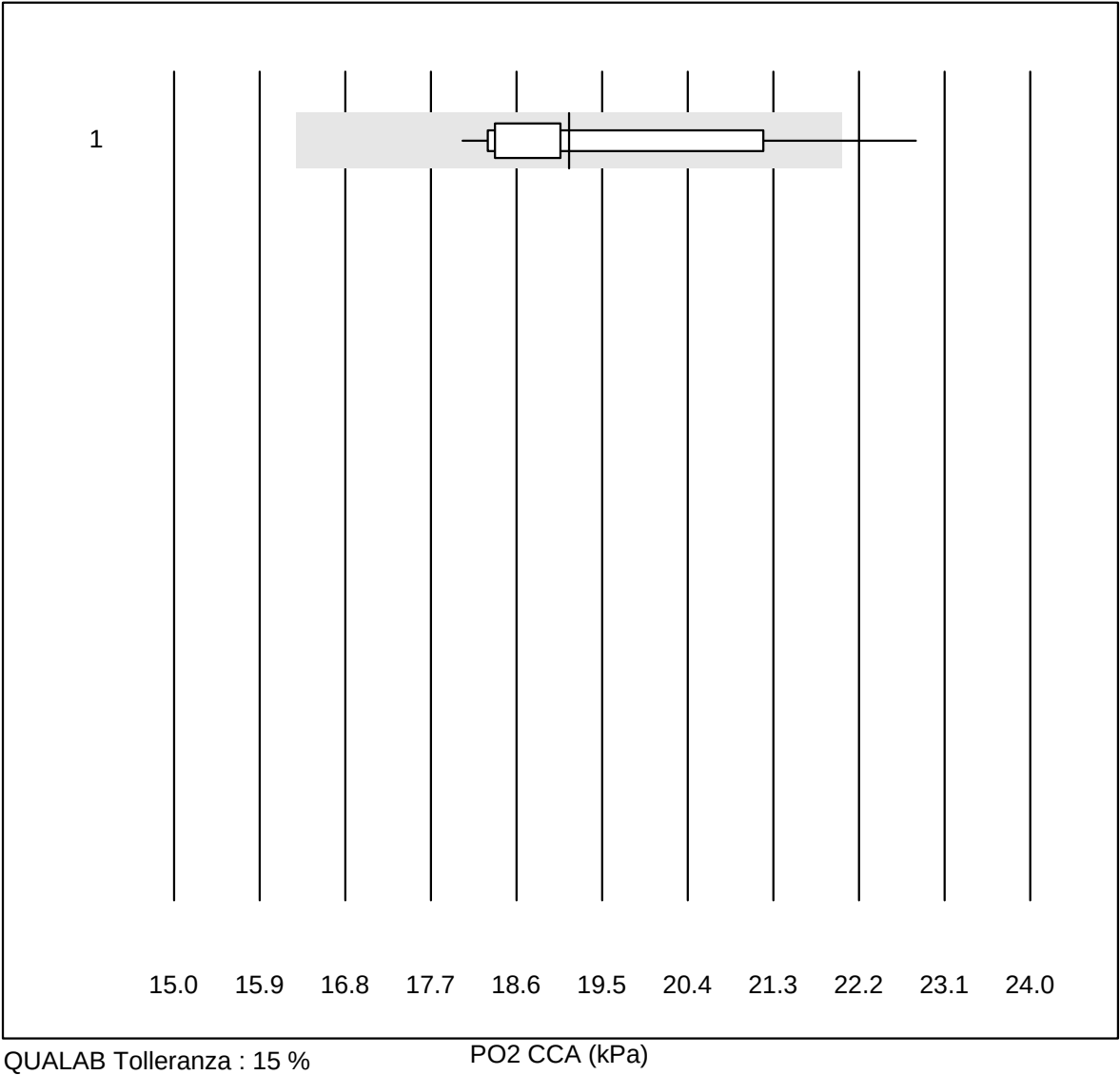


No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	11	90.9	9.1	0.0	19.15	7.7	e*

pH CCA

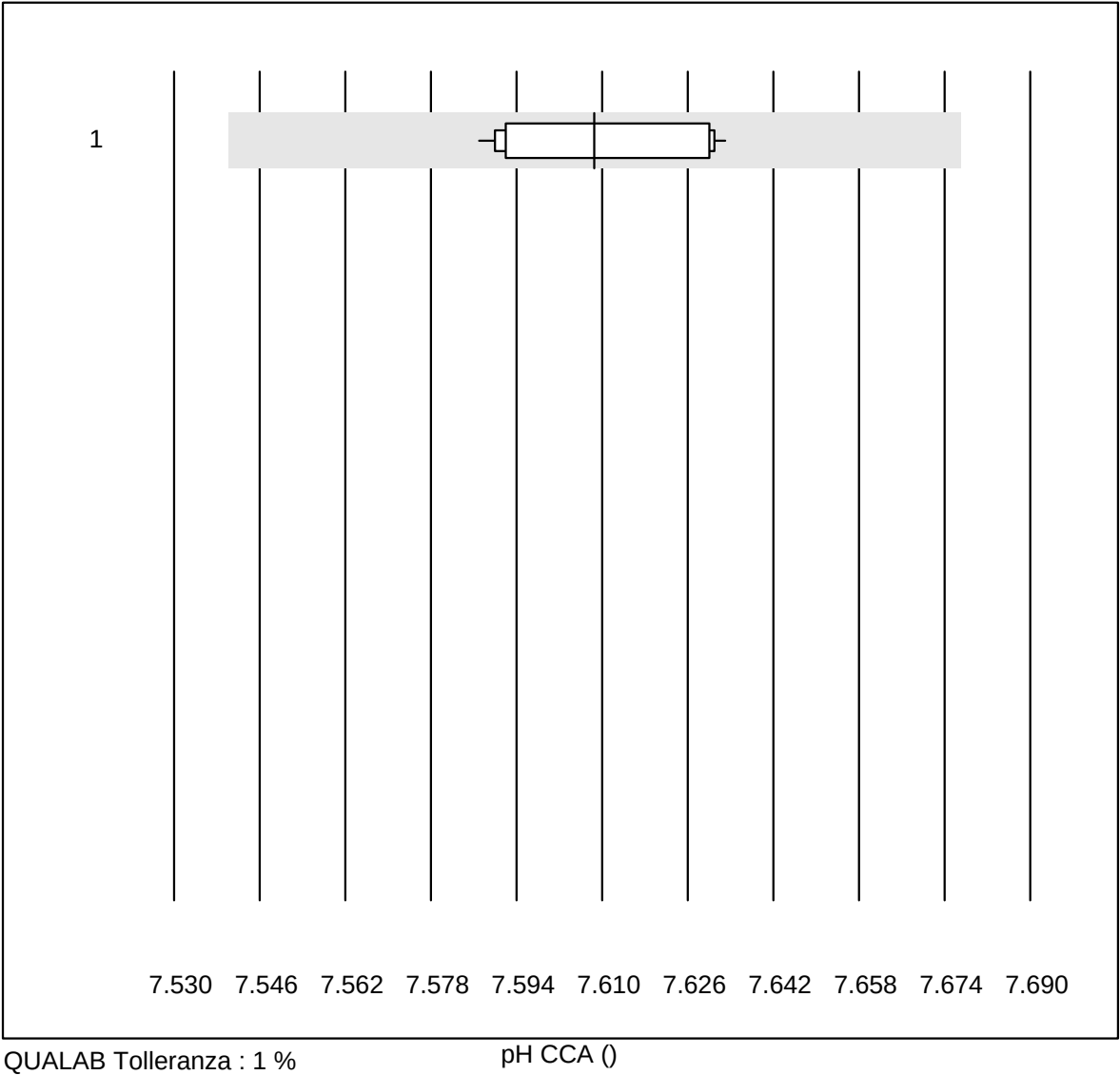

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 OPTI CCA	11	100.0	0.0	0.0	7.61	0.2	e

Potassio CCA

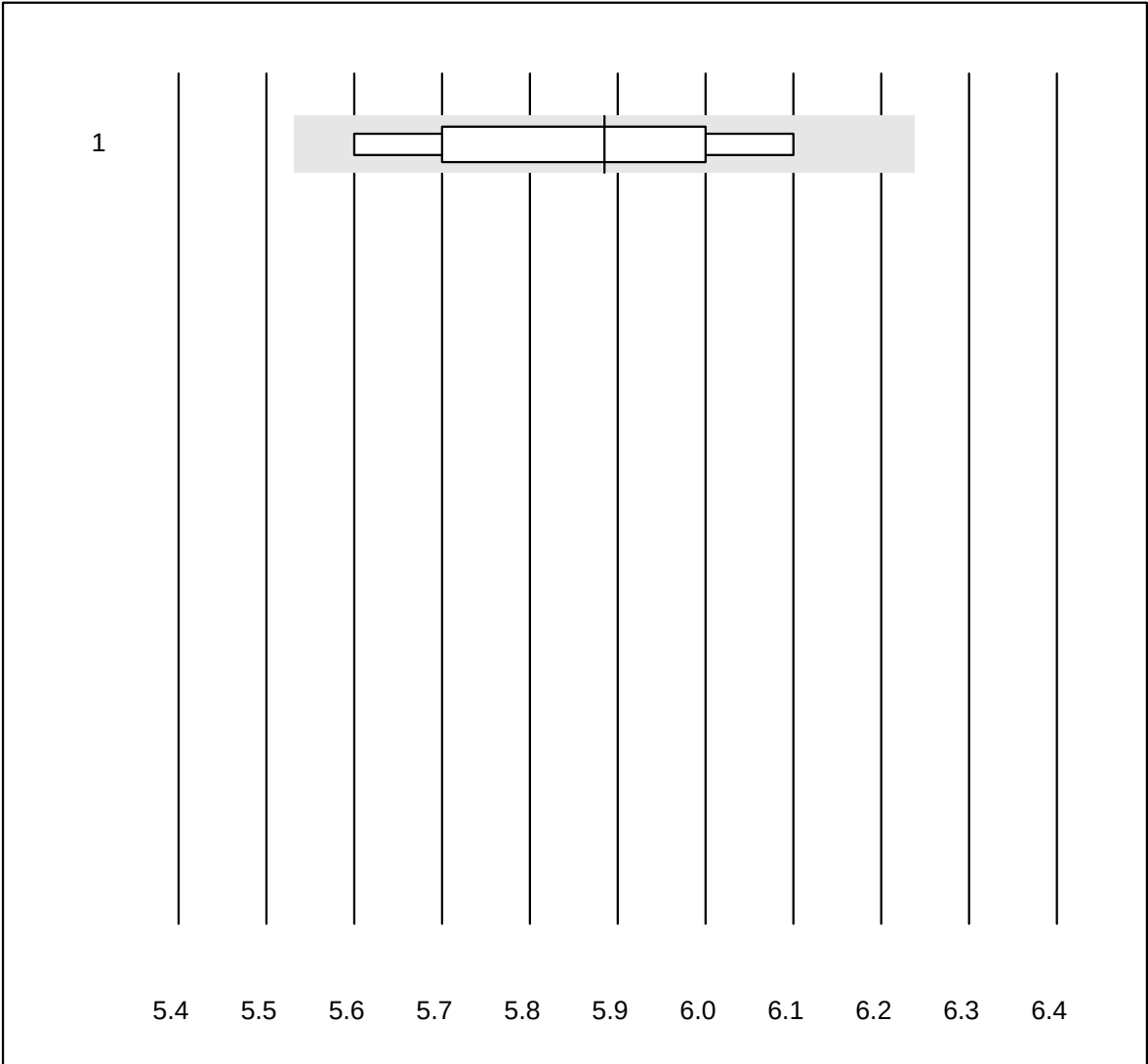


QUALAB Tolleranza : 6 %

Potassio CCA (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	OPTI CCA	6	100.0	0.0	0.0	5.9	3.2	e*

Sodio CCA

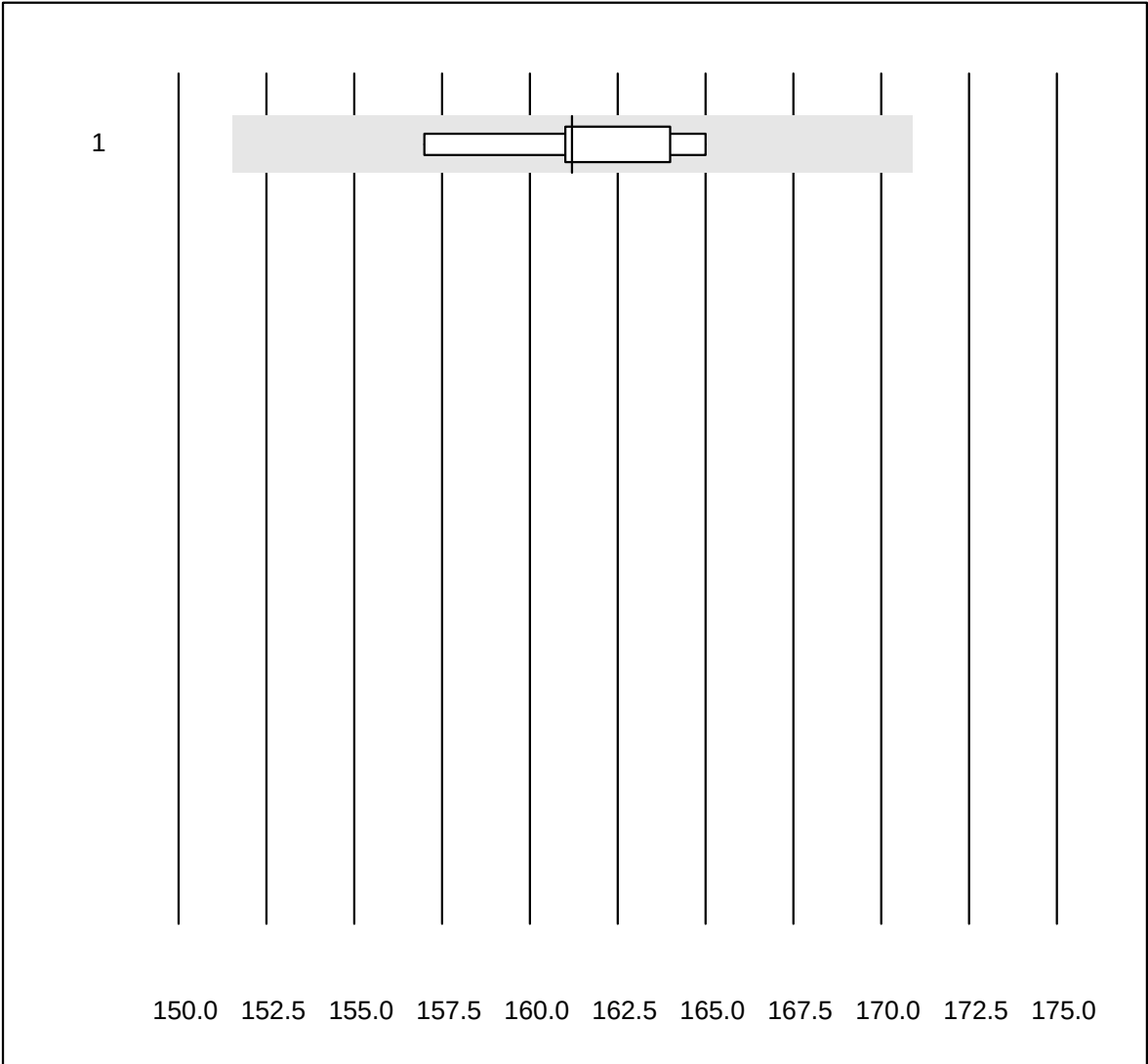


QUALAB Tolleranza : 6 %

Sodio CCA (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	161.2	1.9	e*

Calcio CCA

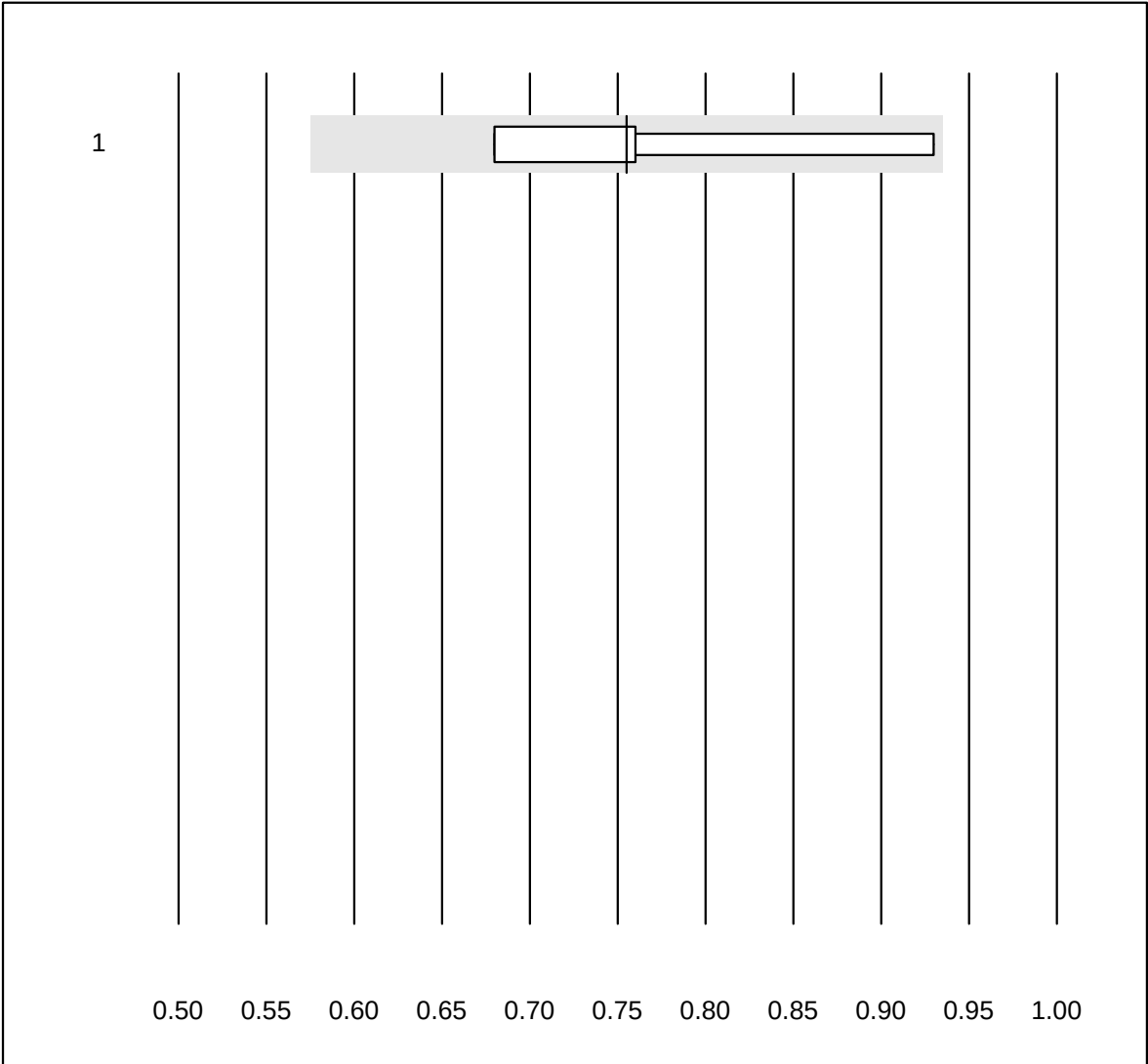


Tolleranza MQ : 9 %
(< 2.00: +/- 0.18 mmol/l)

Calcio CCA (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	0.76	13.6	e*

Ferritina

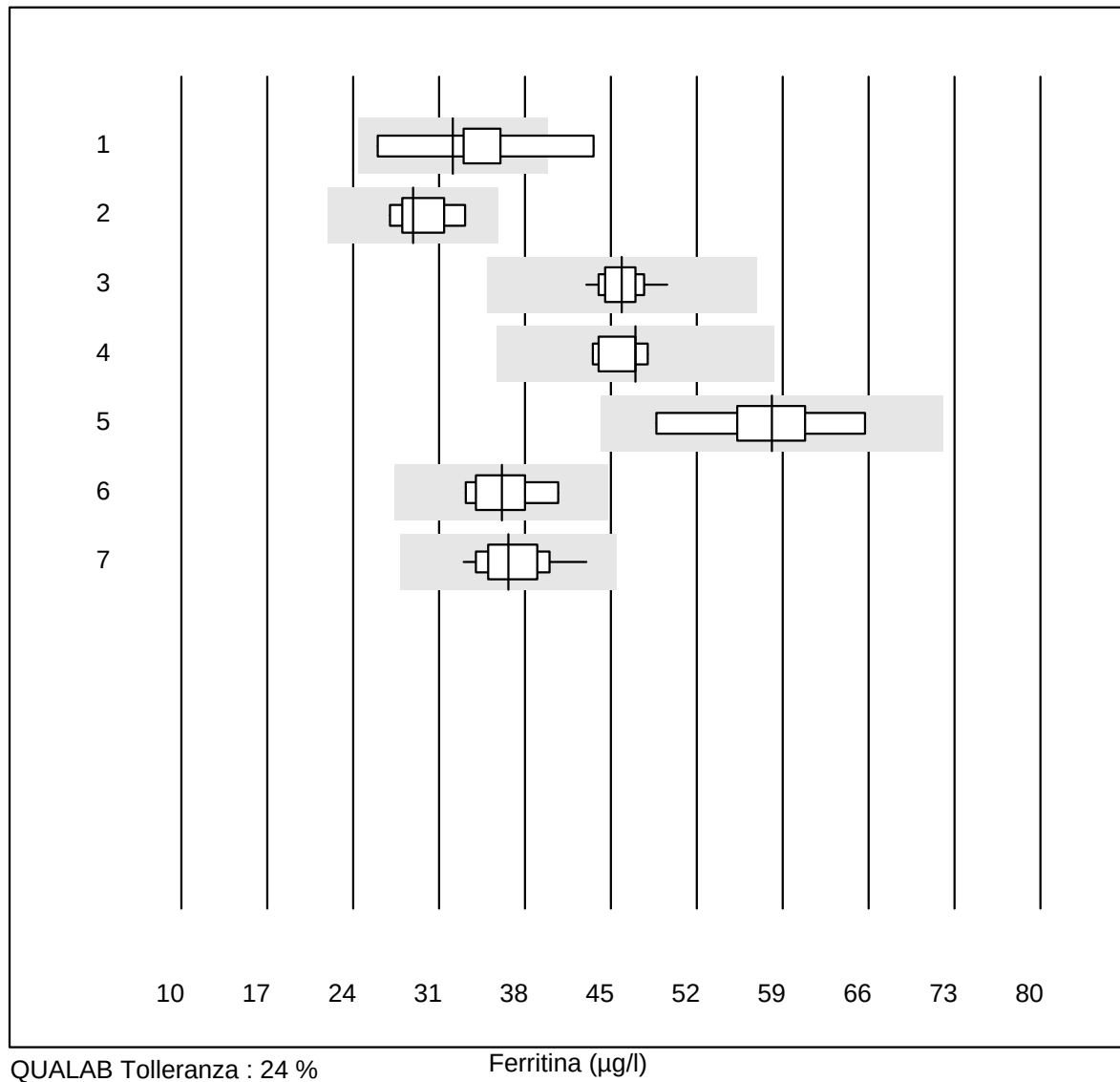


QUALAB Tolleranza : 24 %

Ferritina (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Beckman	10	80.0	10.0	10.0	32.11	14.7	a
2	Siemens	5	100.0	0.0	0.0	28.90	8.5	e*
3	Roche	31	100.0	0.0	0.0	45.88	3.6	e
4	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	47.00	4.4	e
5	DiaSys/Greiner	5	100.0	0.0	0.0	58.10	11.0	e*
6	Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	36.11	7.5	e
7	AFIAS	27	100.0	0.0	0.0	36.65	6.5	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Vitamina B12

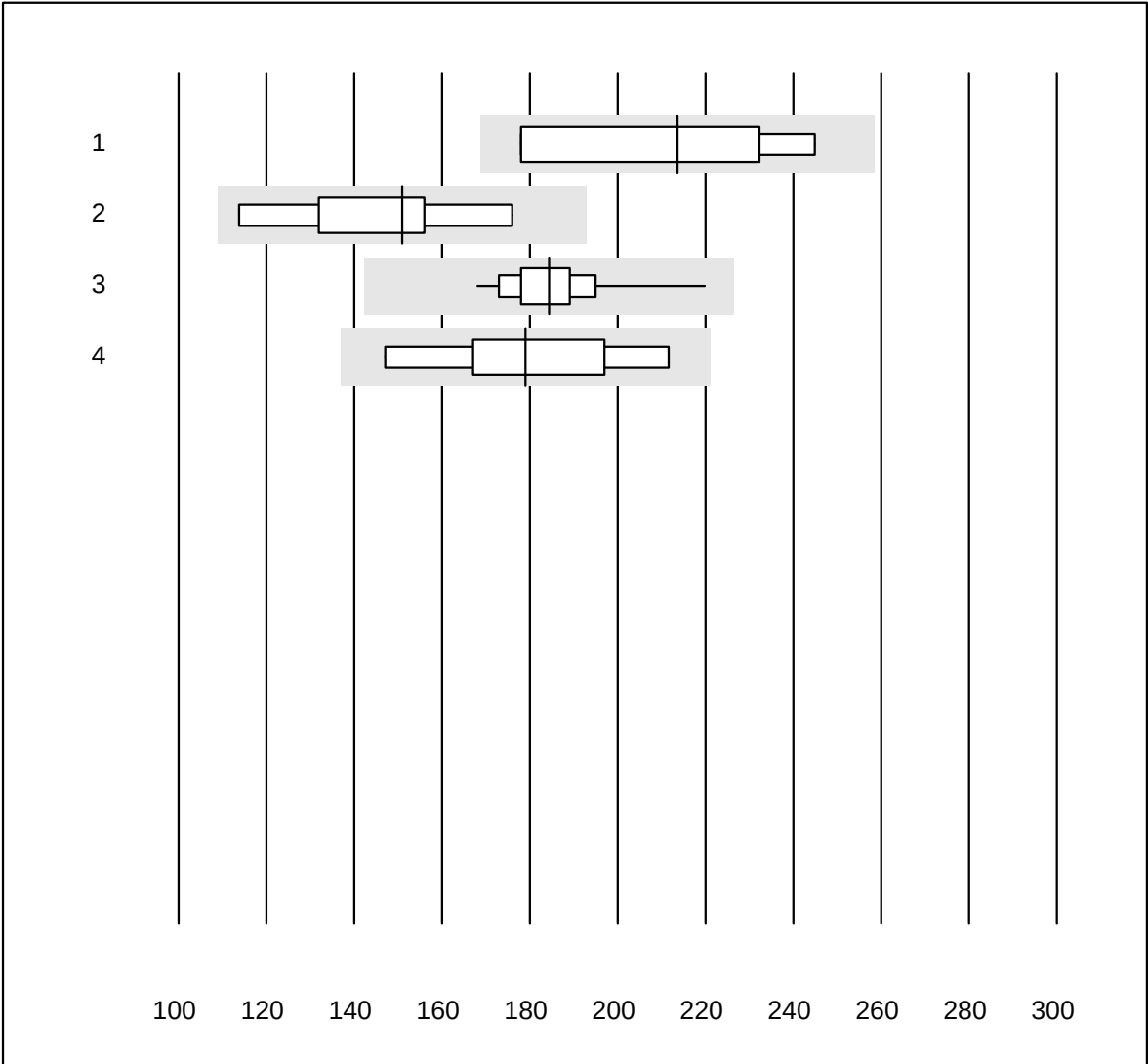


QUALAB Tolleranza : 21 %
(< 200.00: +/- 42.00 pmol/l)

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	213.65	14.7	e*
2	ADVIA Centaur XP/CP	7	100.0	0.0	0.0	151.00	13.3	e*
3	Roche	22	100.0	0.0	0.0	184.34	6.1	e
4	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	179.00	11.4	a

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Acido folico

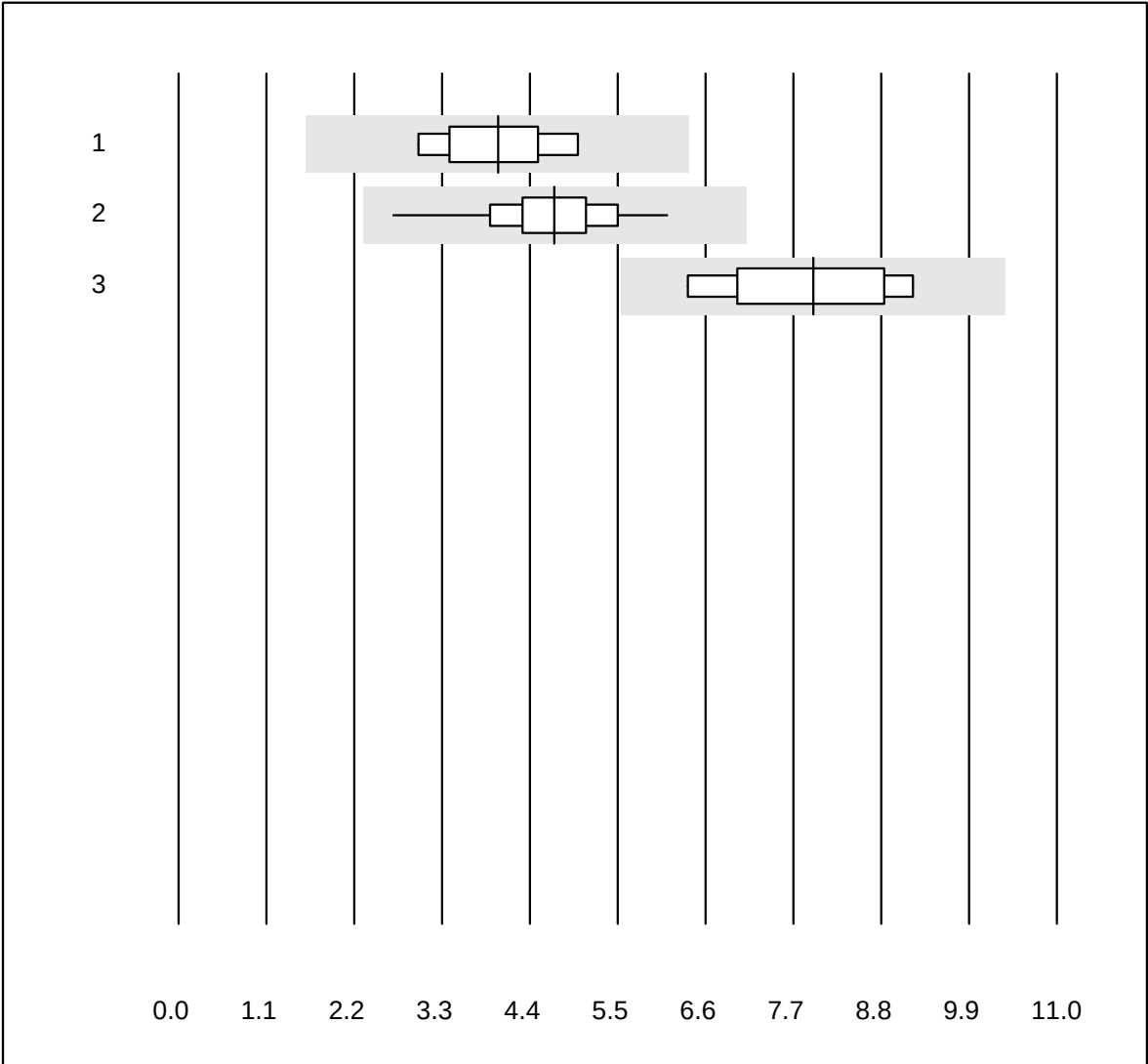


QUALAB Tolleranza : 24 %
(< 10.00: +/- 2.40 nmol/l)

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	4.00	17.5	e*
2	Roche	24	100.0	0.0	0.0	4.71	16.8	e*
3	Abbott	8	87.5	0.0	12.5	7.95	12.4	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Holotranscobalamine

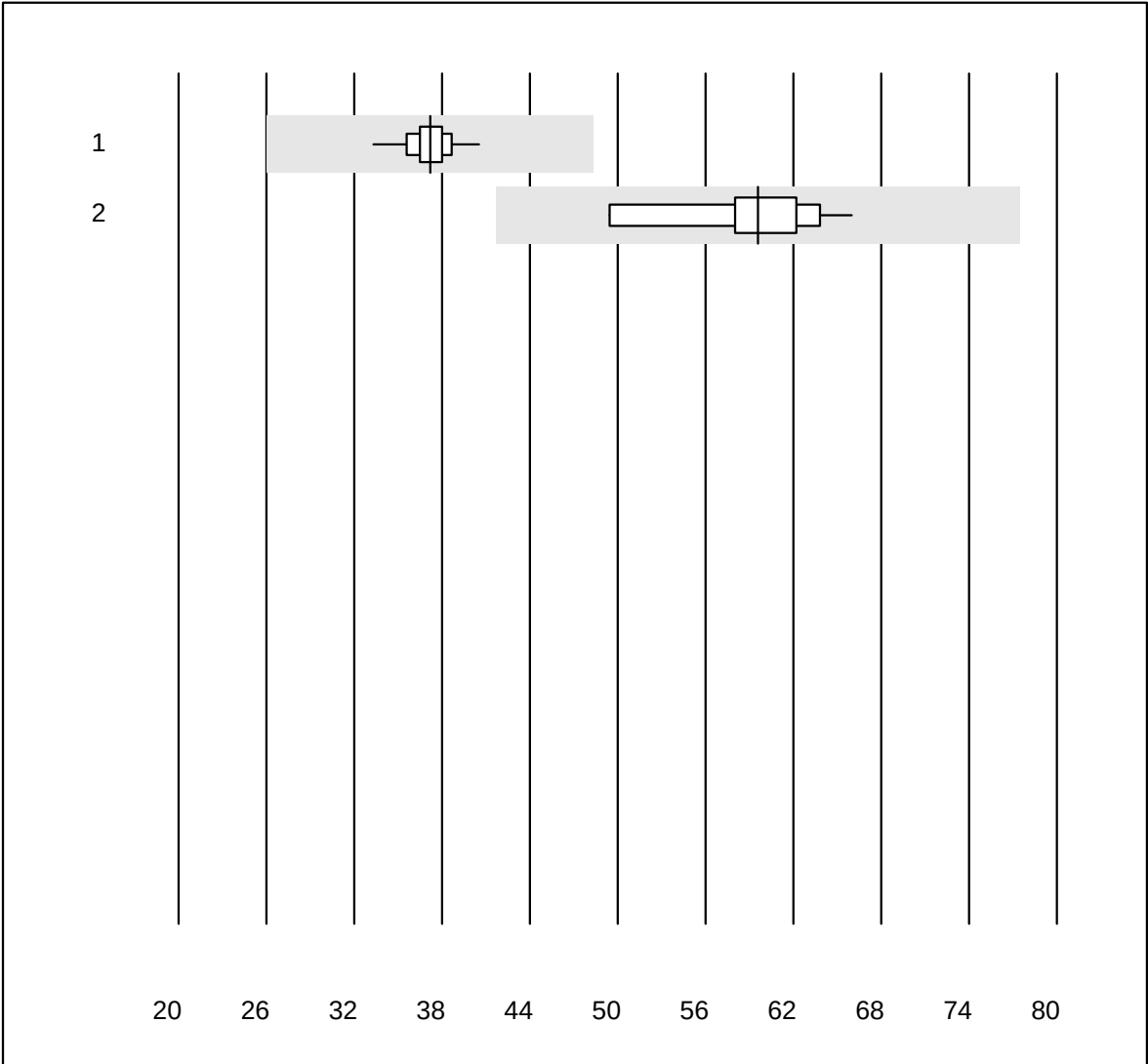


Tolleranza MQ : 30 % Holotranscobalamine (pmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas	44	100.0	0.0	0.0	37.2	3.7	e
2	Abbott	10	100.0	0.0	0.0	59.6	8.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Bilirubina totale Neo

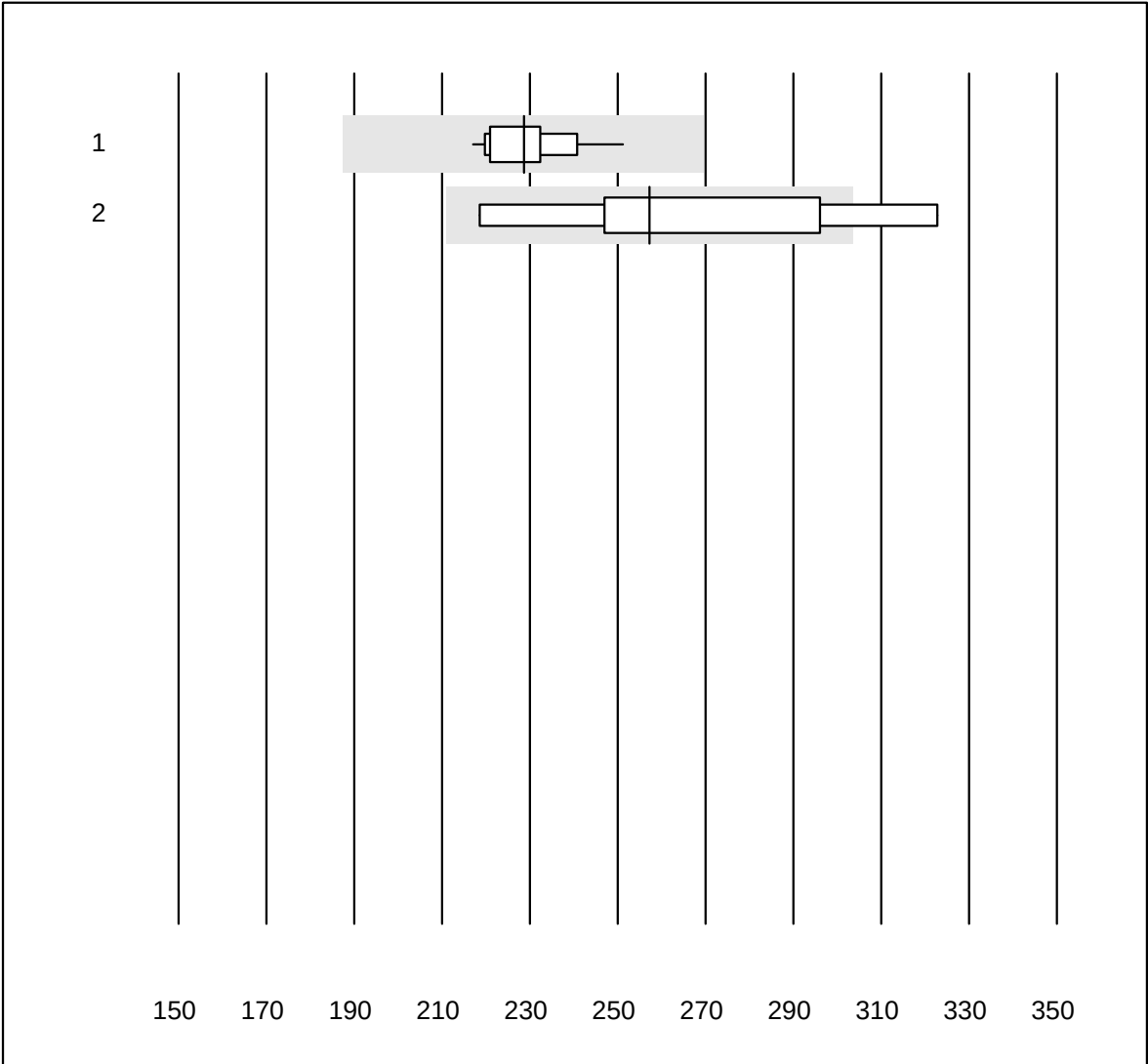


QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina totale Neo (μmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	16	100.0	0.0	0.0	229	3.9	e
2	Dimension	7	85.7	14.3	0.0	257	12.7	a

Bilirubina diretta

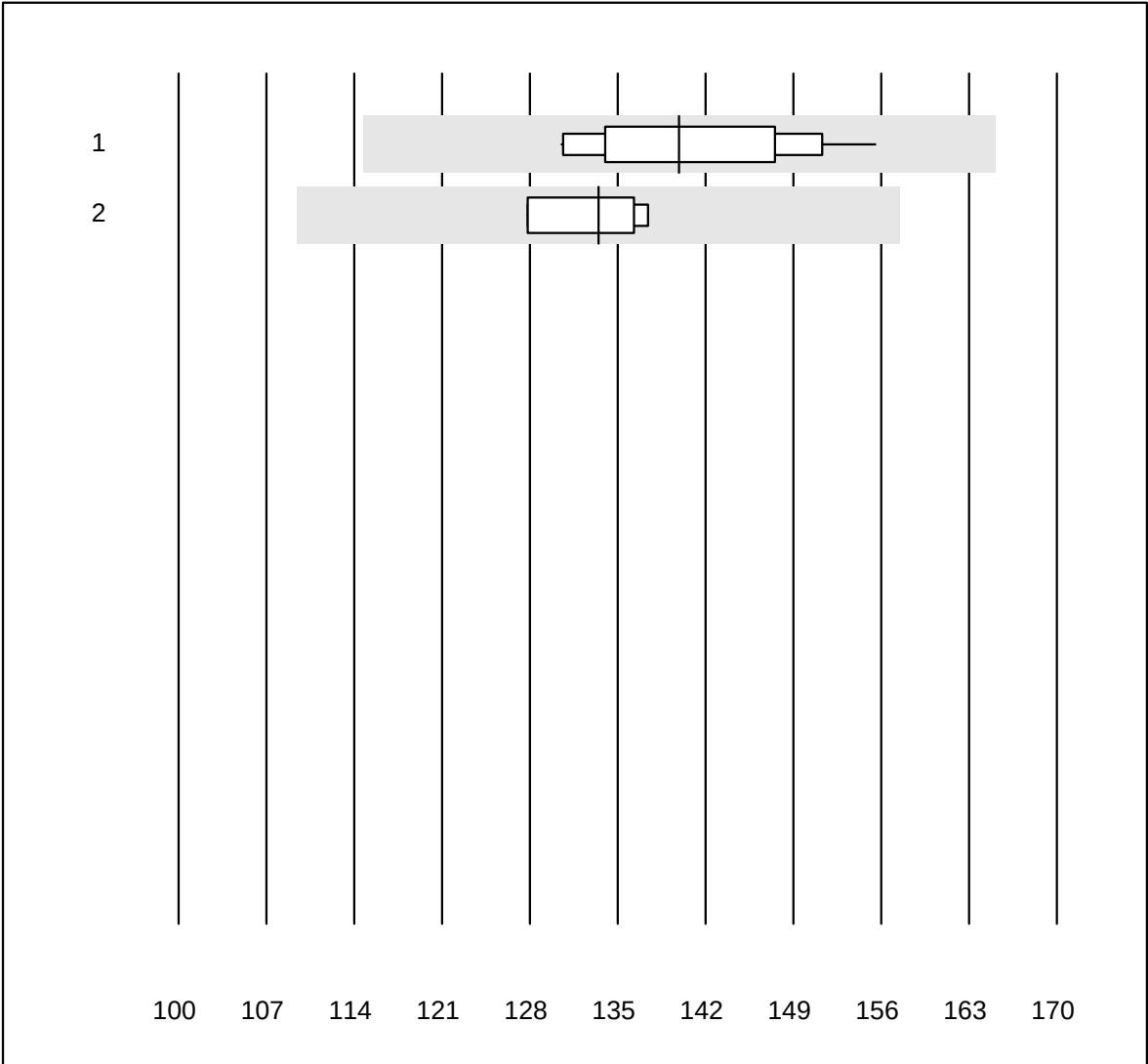


QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina diretta (µmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	19	100.0	0.0	0.0	140	5.6	e
2	Dimension	4	100.0	0.0	0.0	133	3.4	e


Bilirubina indiretta

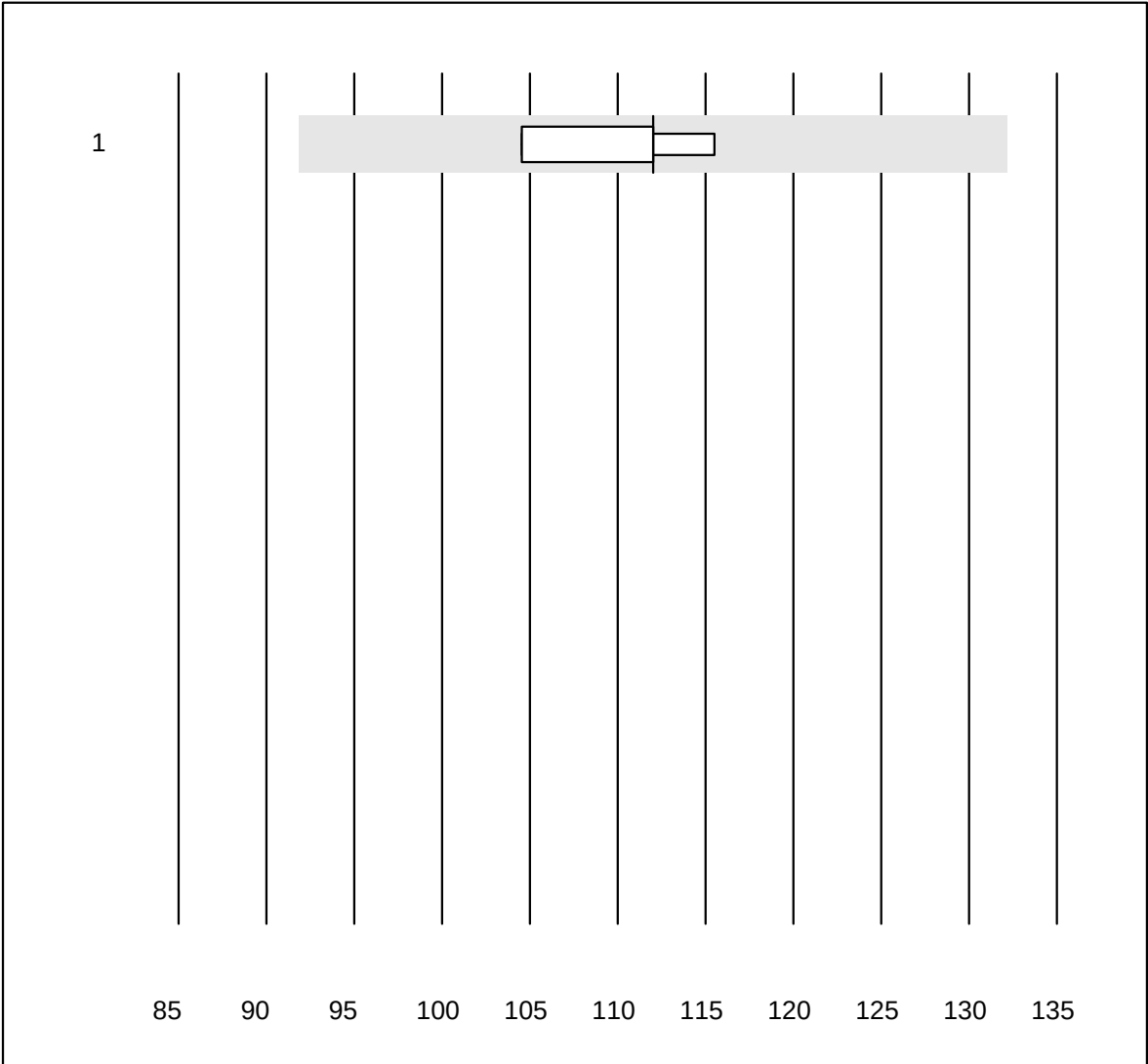

QUALAB Tolleranza : 18 % Bilirubina indiretta (μmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	5	80.0	0.0	20.0	112	4.1	e

Bilirubina neonatale

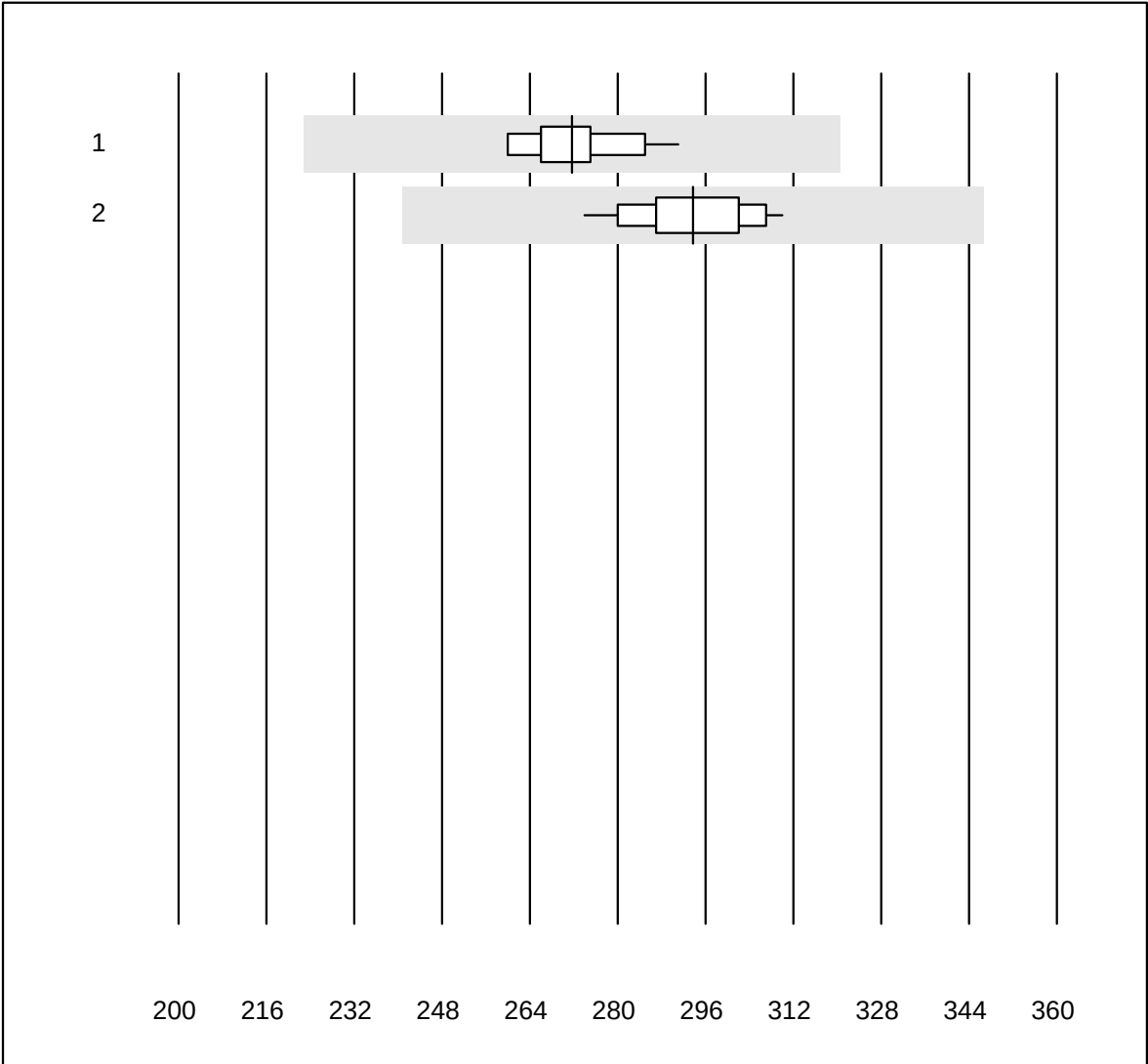


QUALAB Tolleranza : 18 %

Bilirubina neonatale (μmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	272	3.6	e
2	altri metodi	17	100.0	0.0	0.0	294	3.4	e

PSA

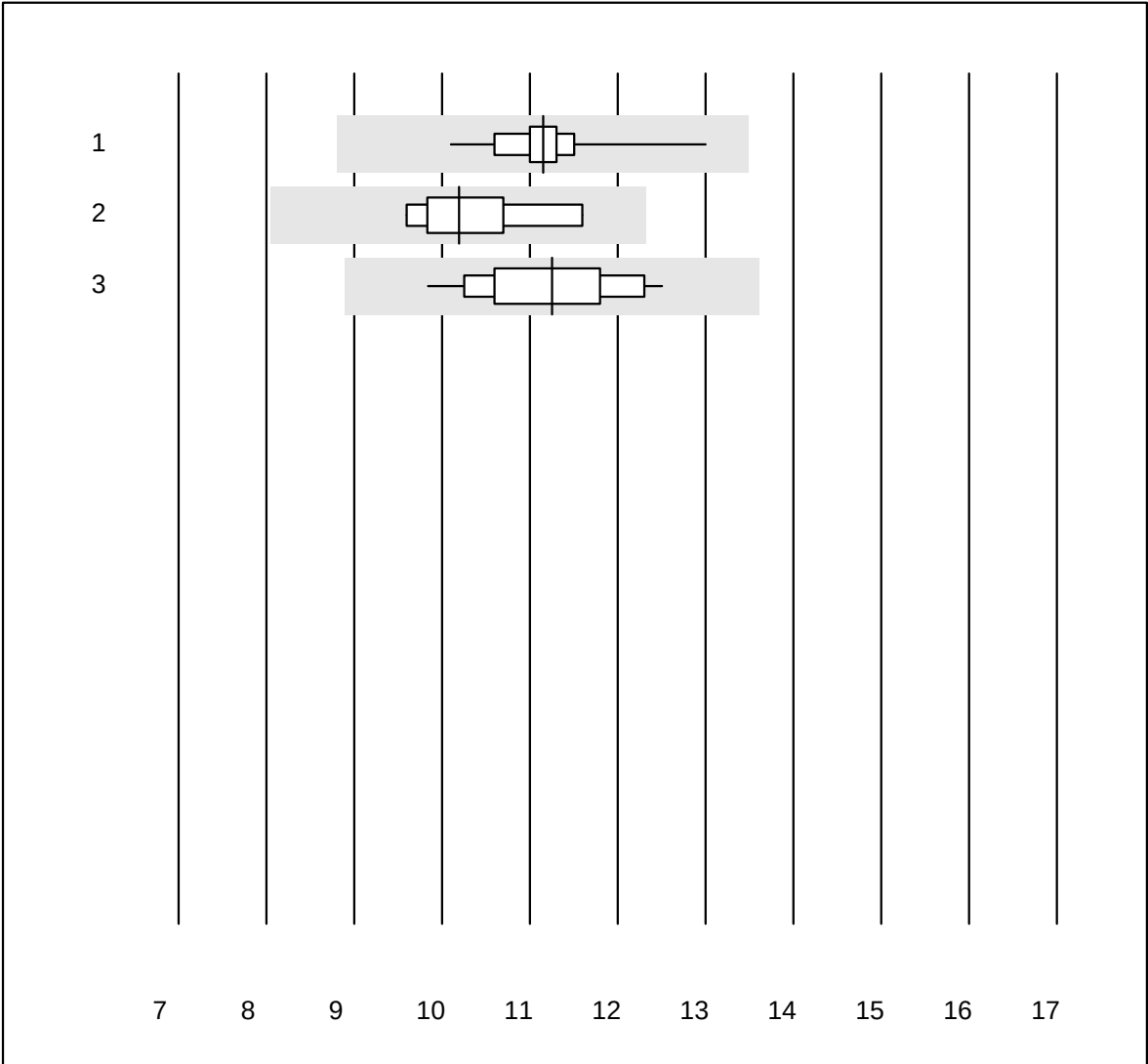


QUALAB Tolleranza : 21 %

PSA (µg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	22	100.0	0.0	0.0	11.15	4.8	e
2	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	10.19	6.9	e*
3	AFIAS	12	100.0	0.0	0.0	11.25	7.2	e

10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

PSA libero

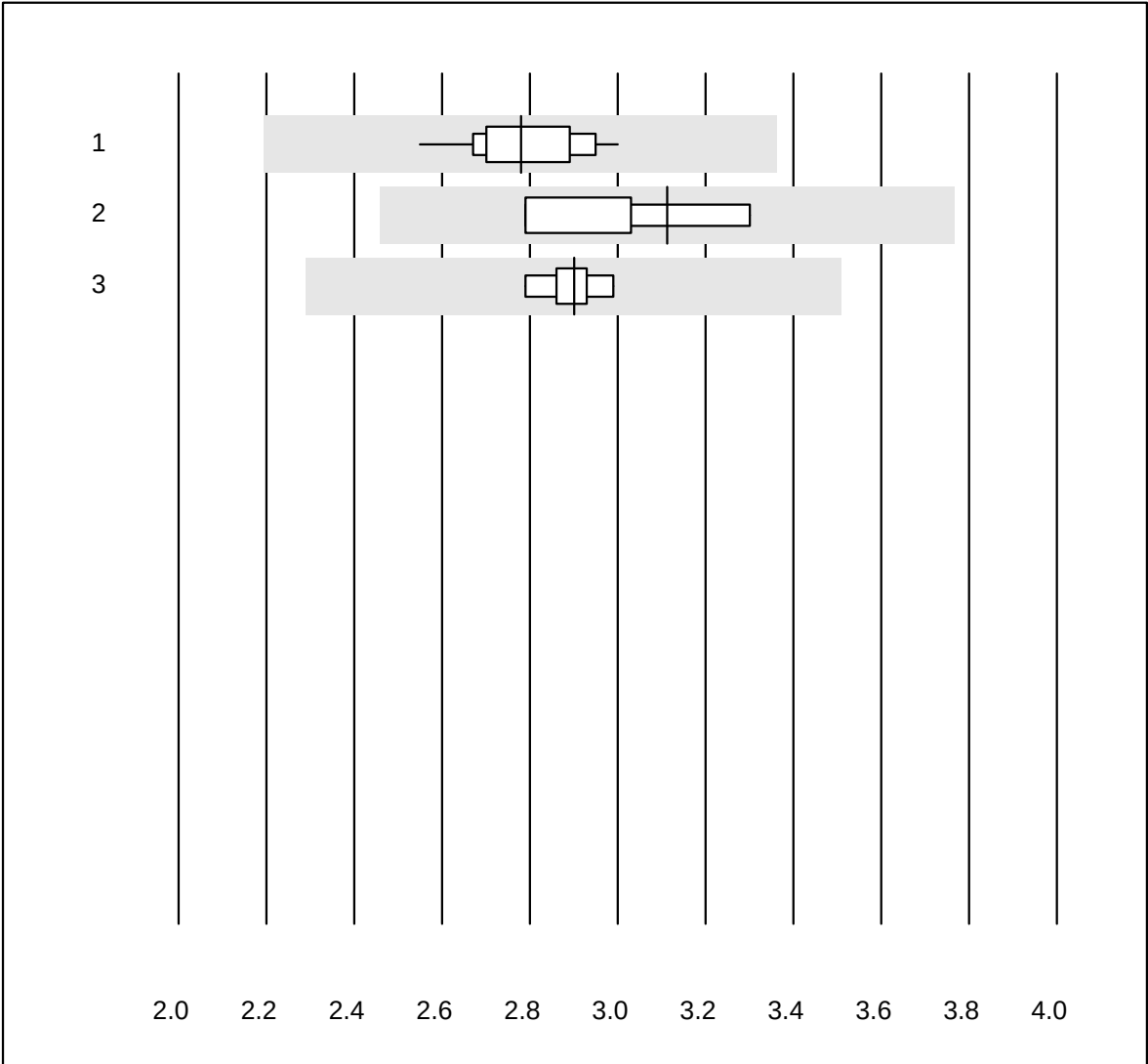


QUALAB Tolleranza : 21 %

PSA libero (µg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	2.78	4.5	e
2	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	3.11	6.9	d
3	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.90	2.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

CEA

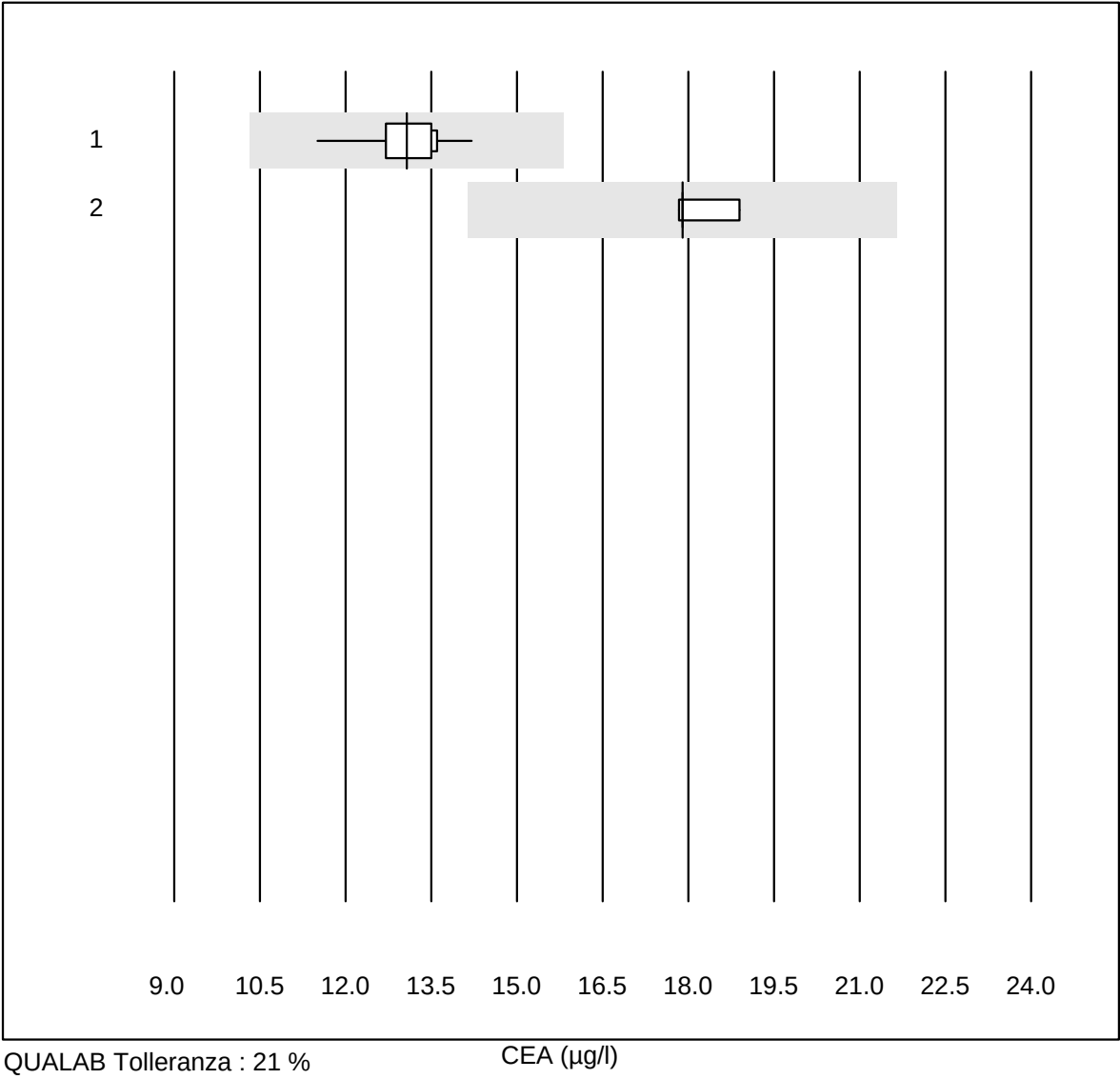


QUALAB Tolleranza : 21 %

CEA (µg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	13.1	4.6	e
2	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	17.9	2.5	e

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CA 125

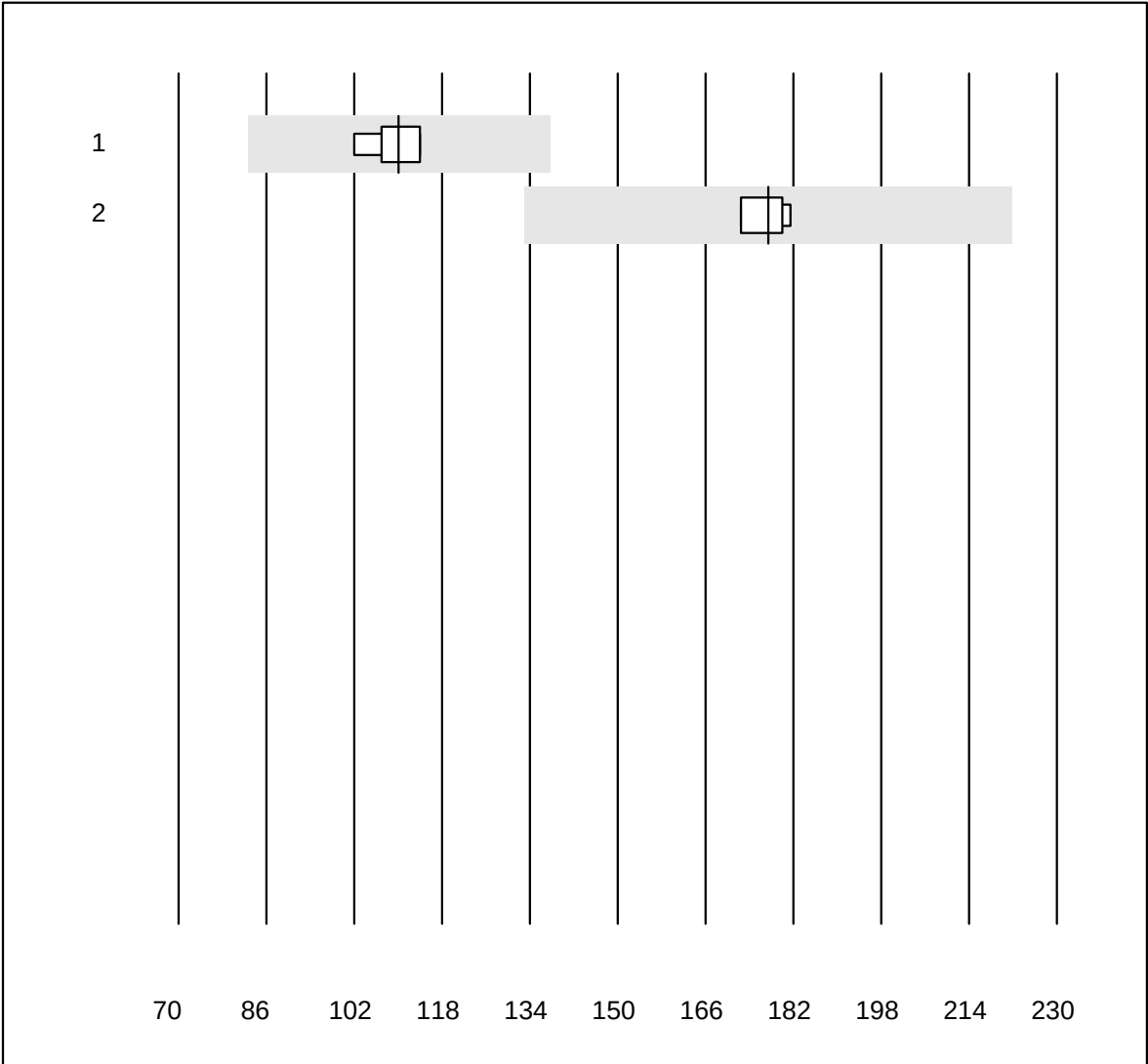


Tolleranza MQ : 25 %

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	10	100.0	0.0	0.0	110.1	4.2	e
2	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	177.4	2.4	e

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

CA 19-9

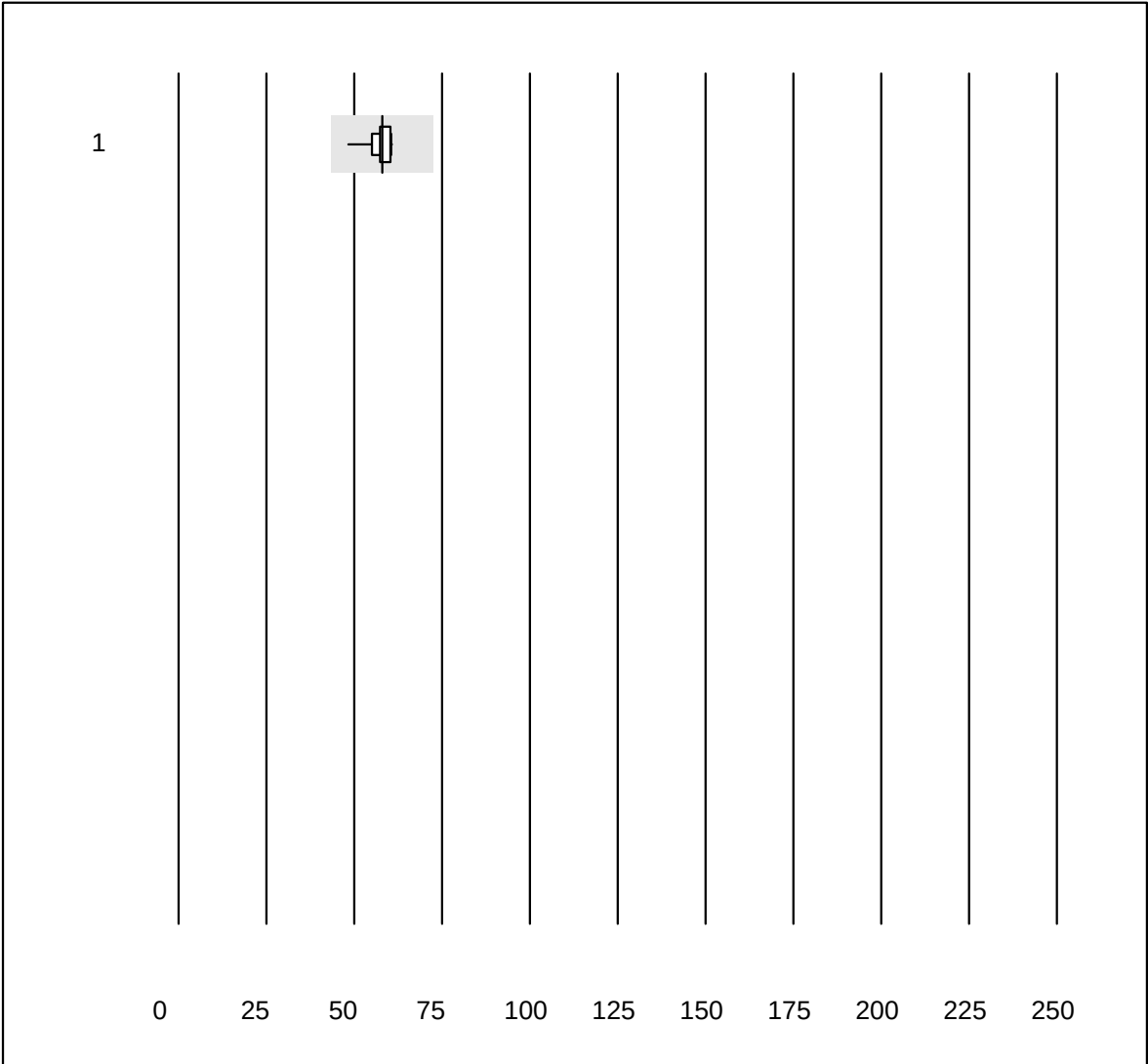


Tolleranza MQ : 25 % CA 19-9 (kIU/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	57.9	6.2	e

10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

CA 15-3

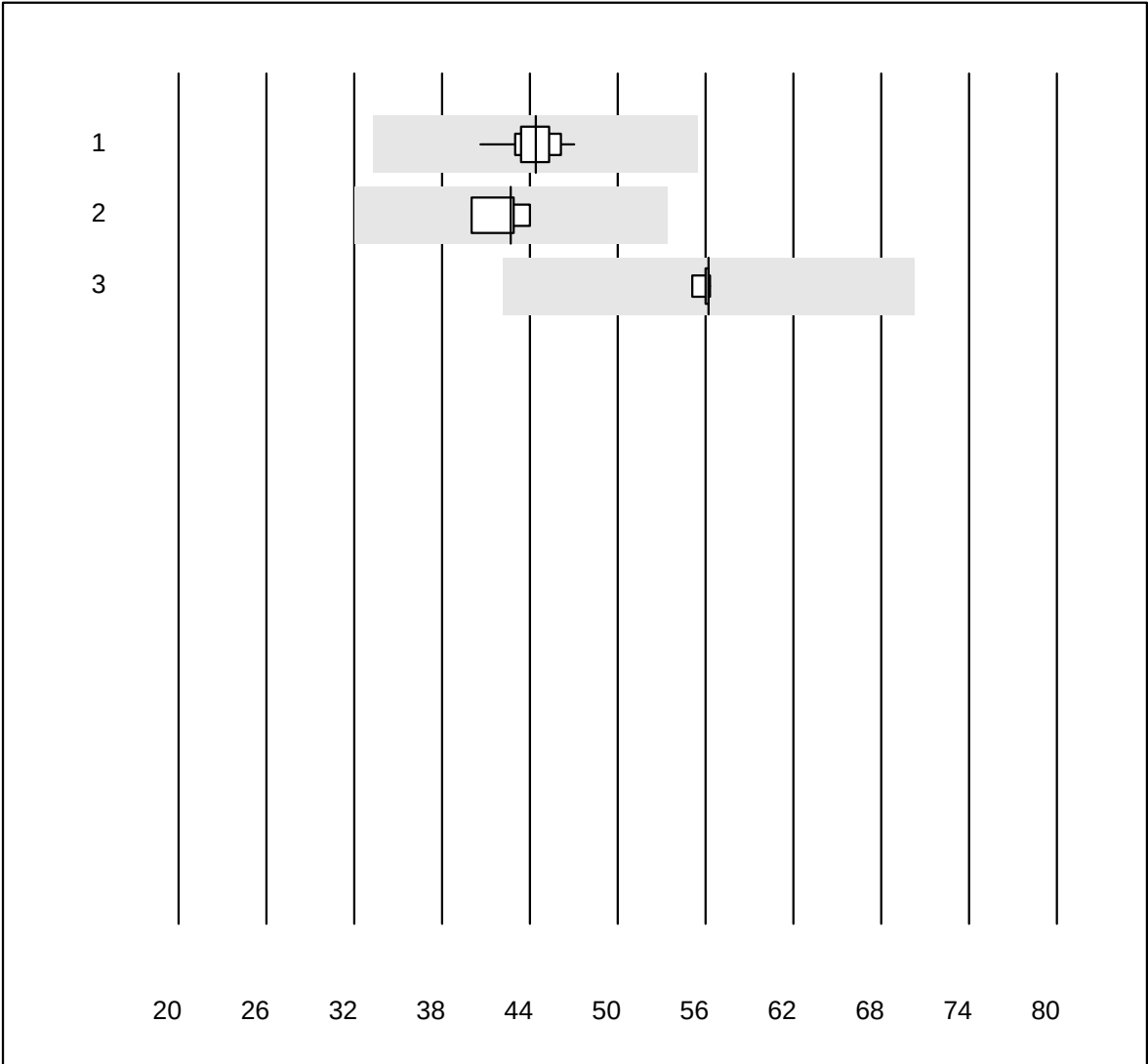


Tolleranza MQ : 25 %

CA 15-3 (kIU/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	12	100.0	0.0	0.0	44.4	3.8	e
2	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	42.7	4.0	e
3	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	56.2	0.9	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

AFP

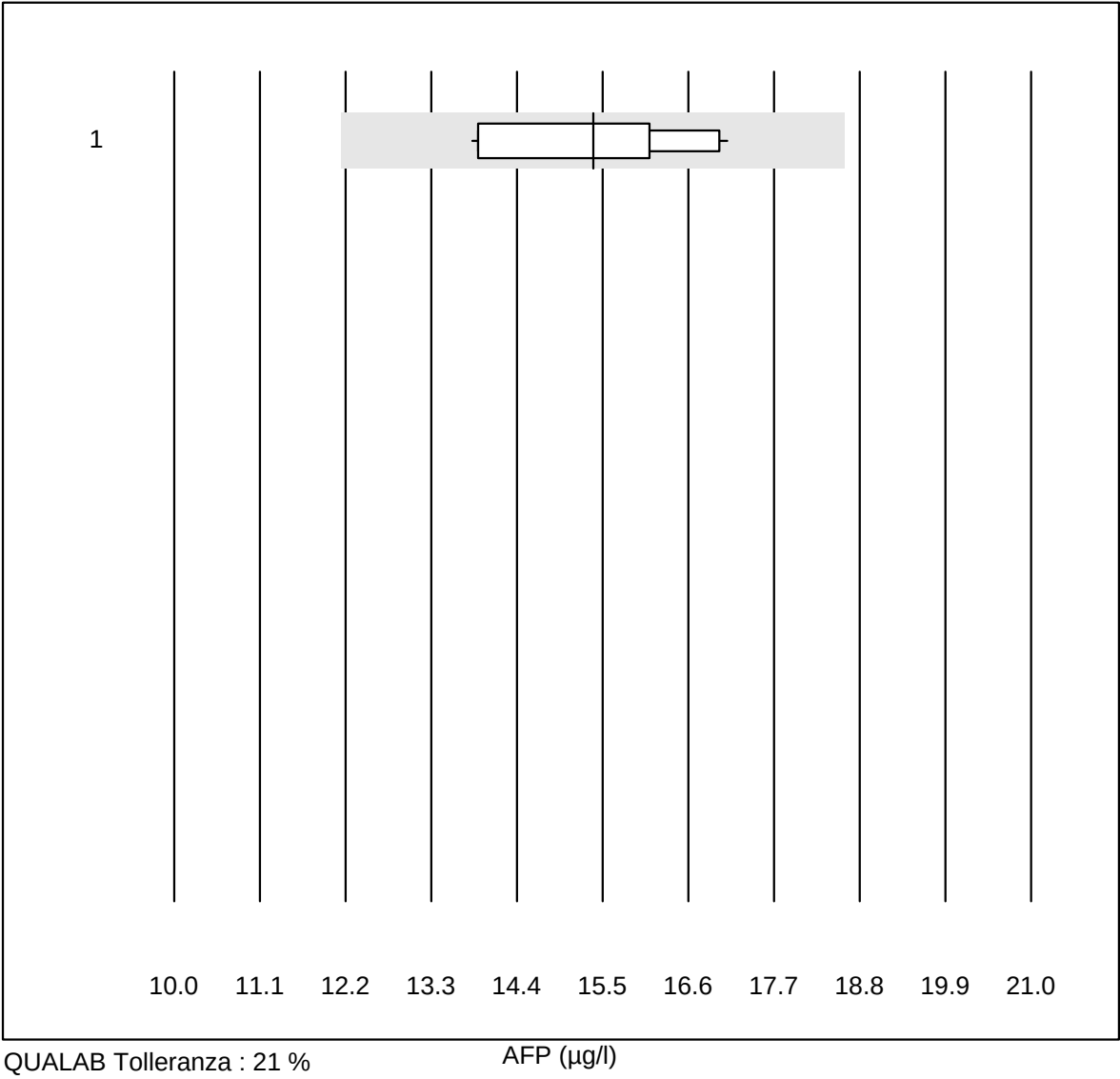


QUALAB Tolleranza : 21 %

AFP (μg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	15.4	7.7	e
10 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

HCG qn

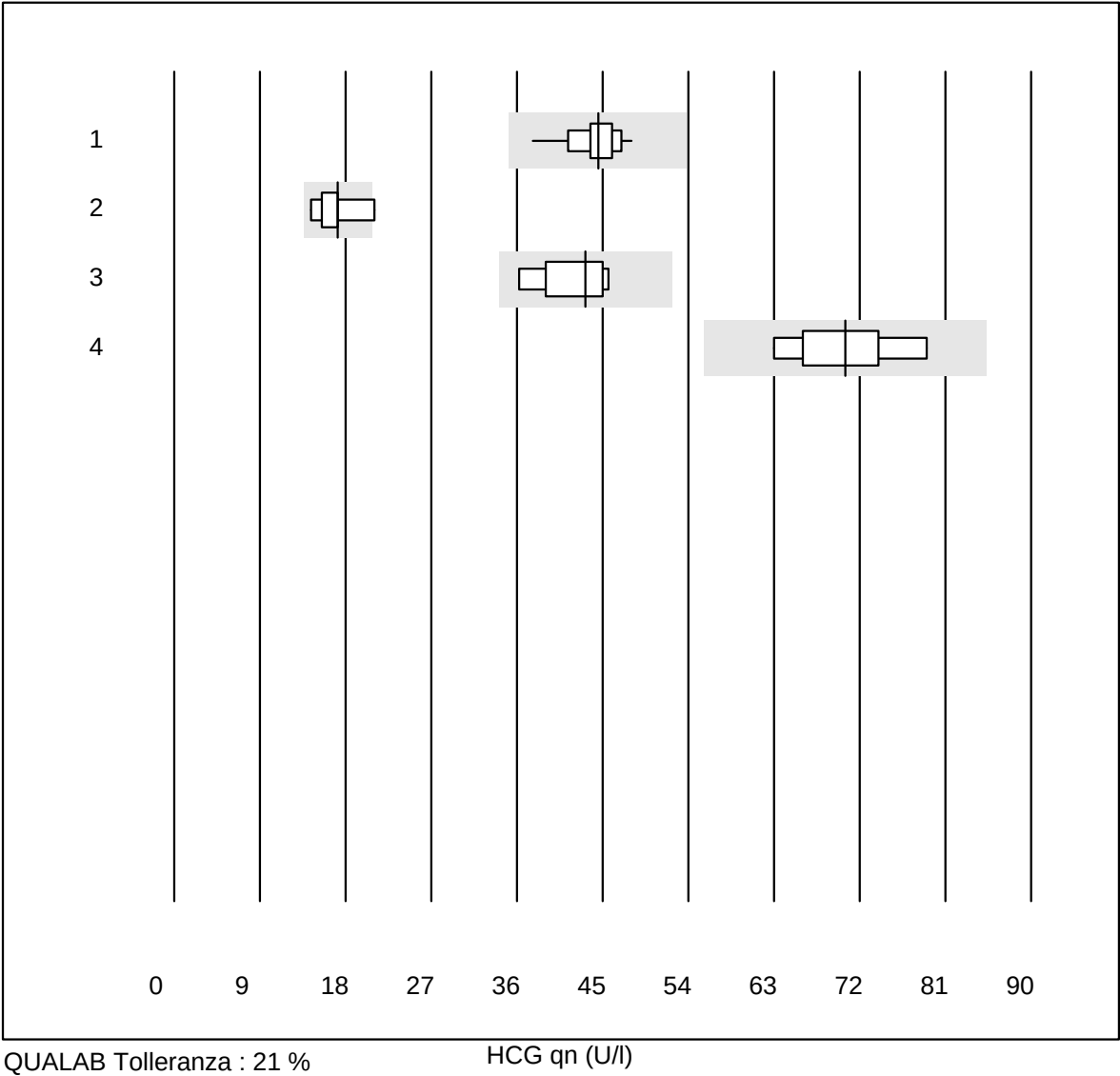


QUALAB Tolleranza : 21 %

HCG qn (U/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	21	100.0	0.0	0.0	44.5	5.5	e
2	VIDAS	8	87.5	12.5	0.0	17.2	12.0	d
3	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	43.2	9.7	e*
4	AFIAS	6	100.0	0.0	0.0	70.5	8.2	e*

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

HCG intatto

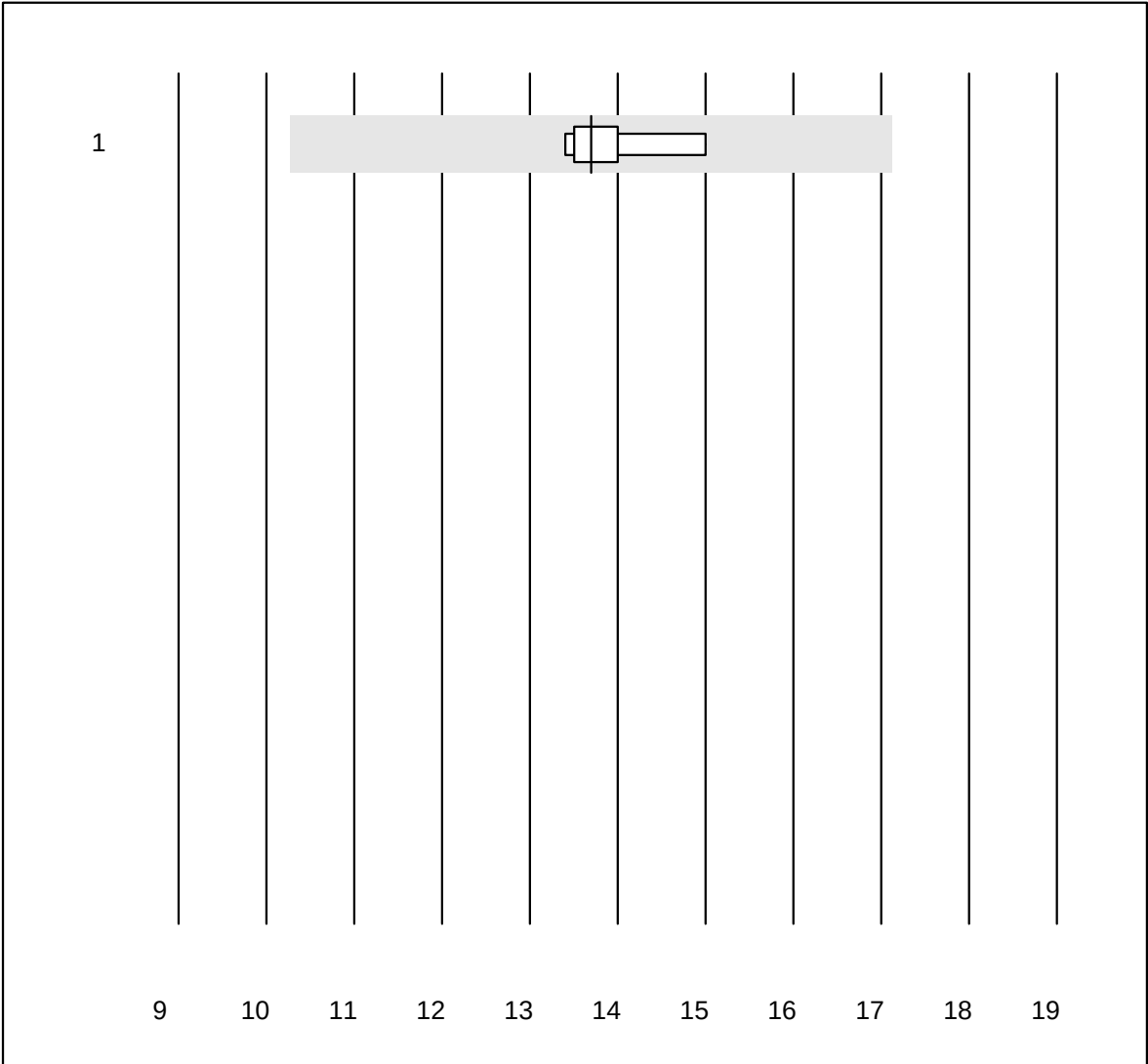


QUALAB Tolleranza : 25 % HCG intatto (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	5	100.0	0.0	0.0	13.7	4.6	e


Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

S100

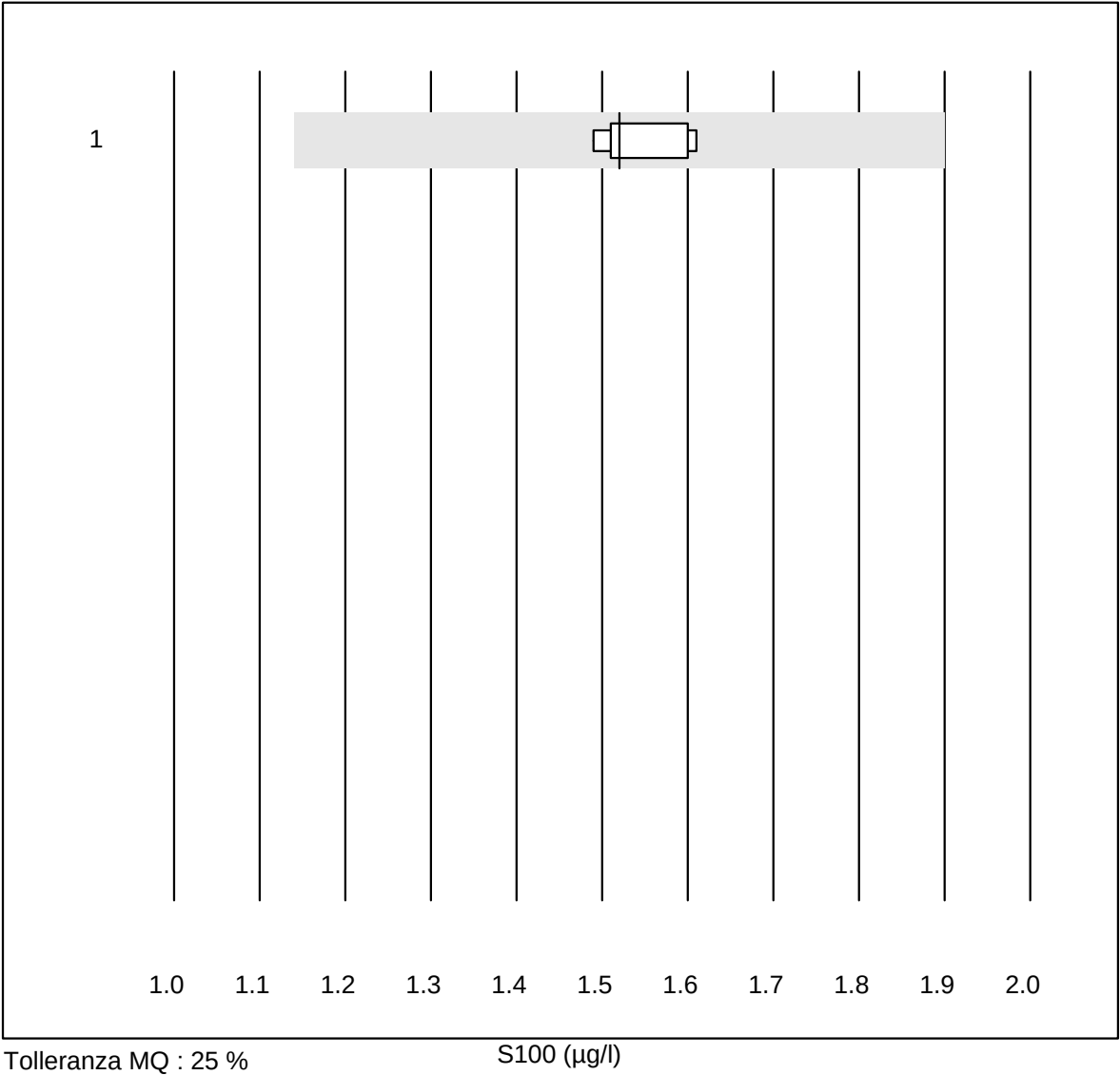


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	1.52	3.6	e

NSE

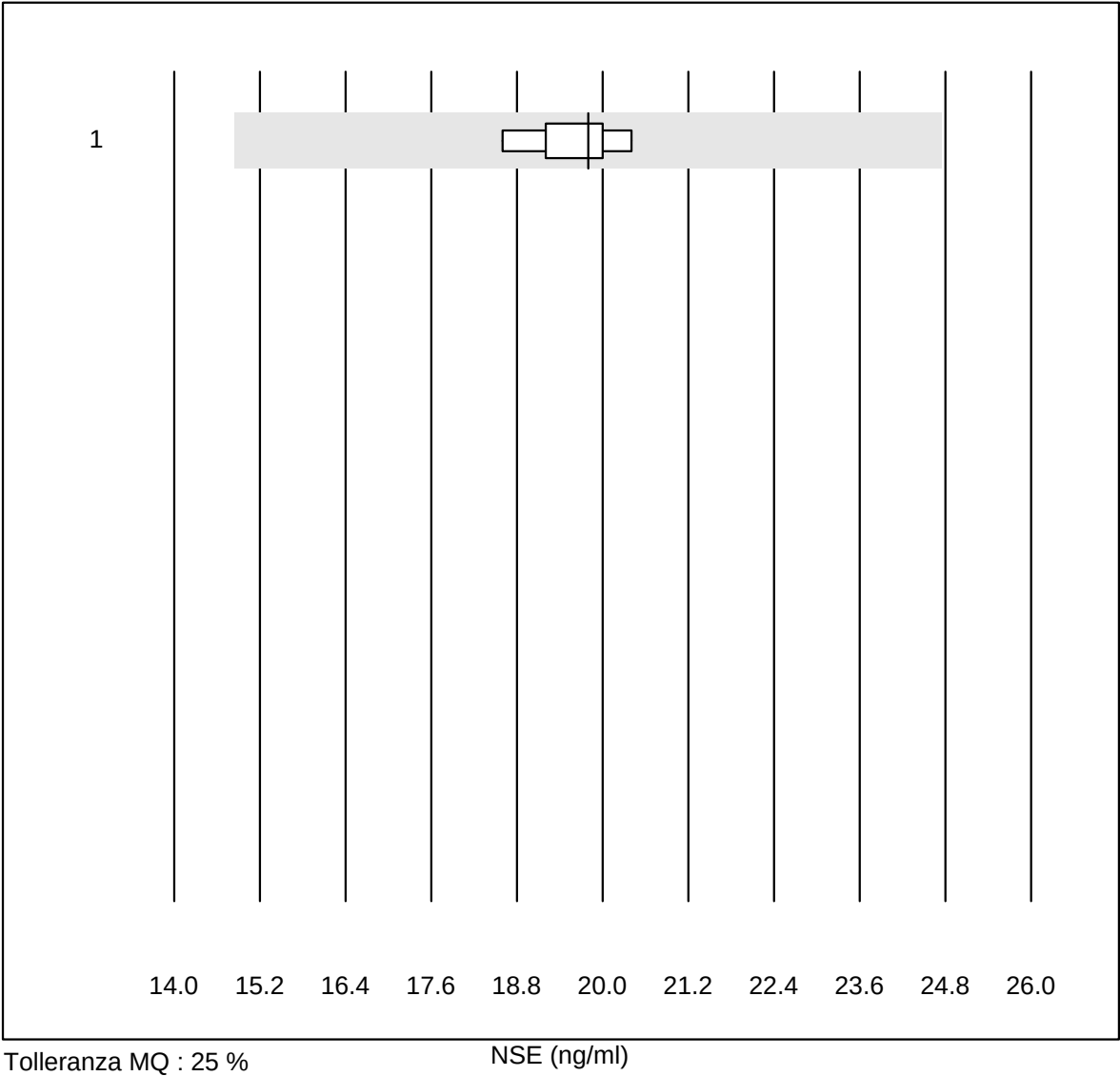

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	19.8	3.0	e


Tireoglobulina

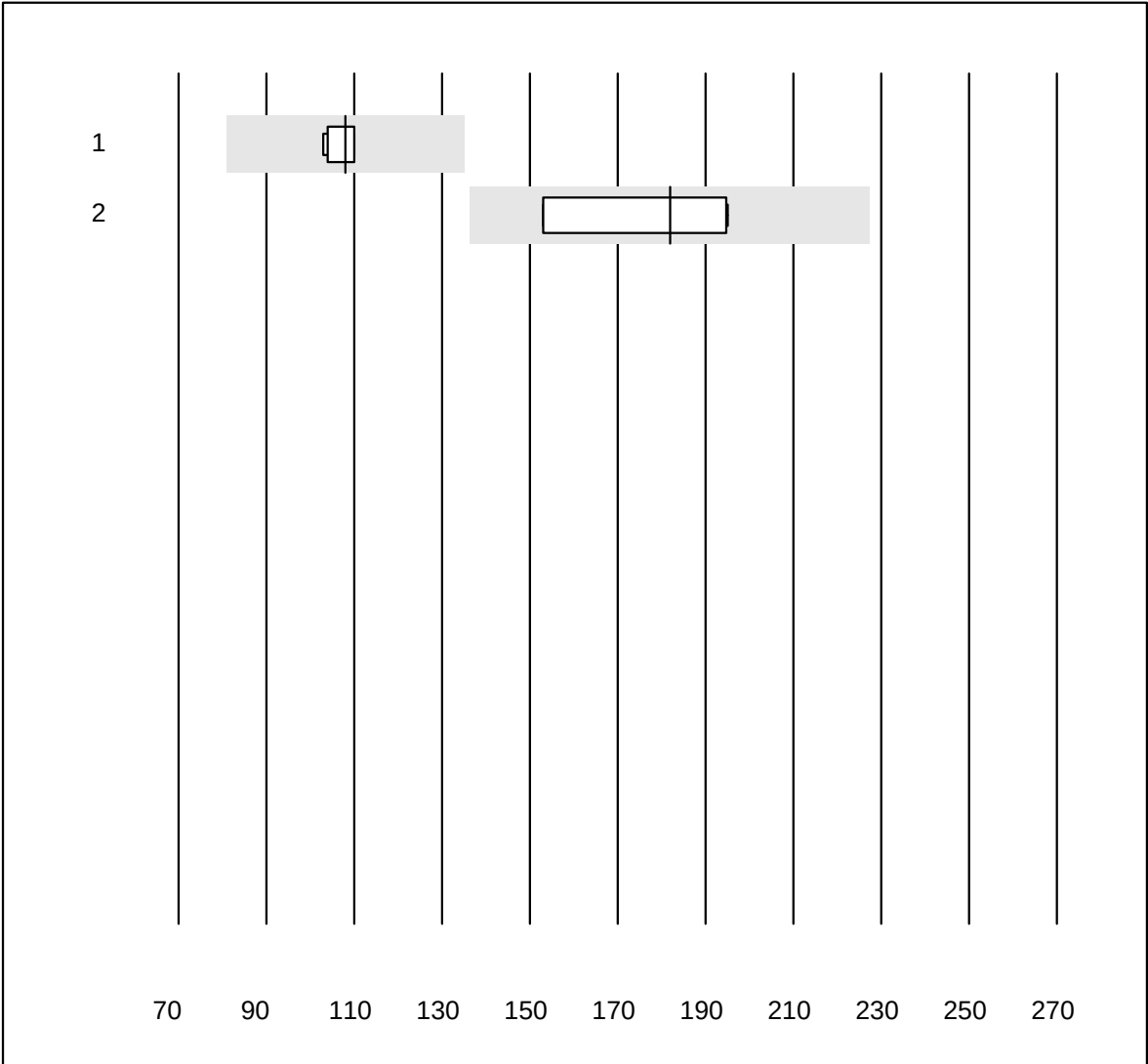

Tolleranza MQ : 25 %

Tireoglobulina (µg/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	108.0	2.7	e
2	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	181.9	11.6	e*

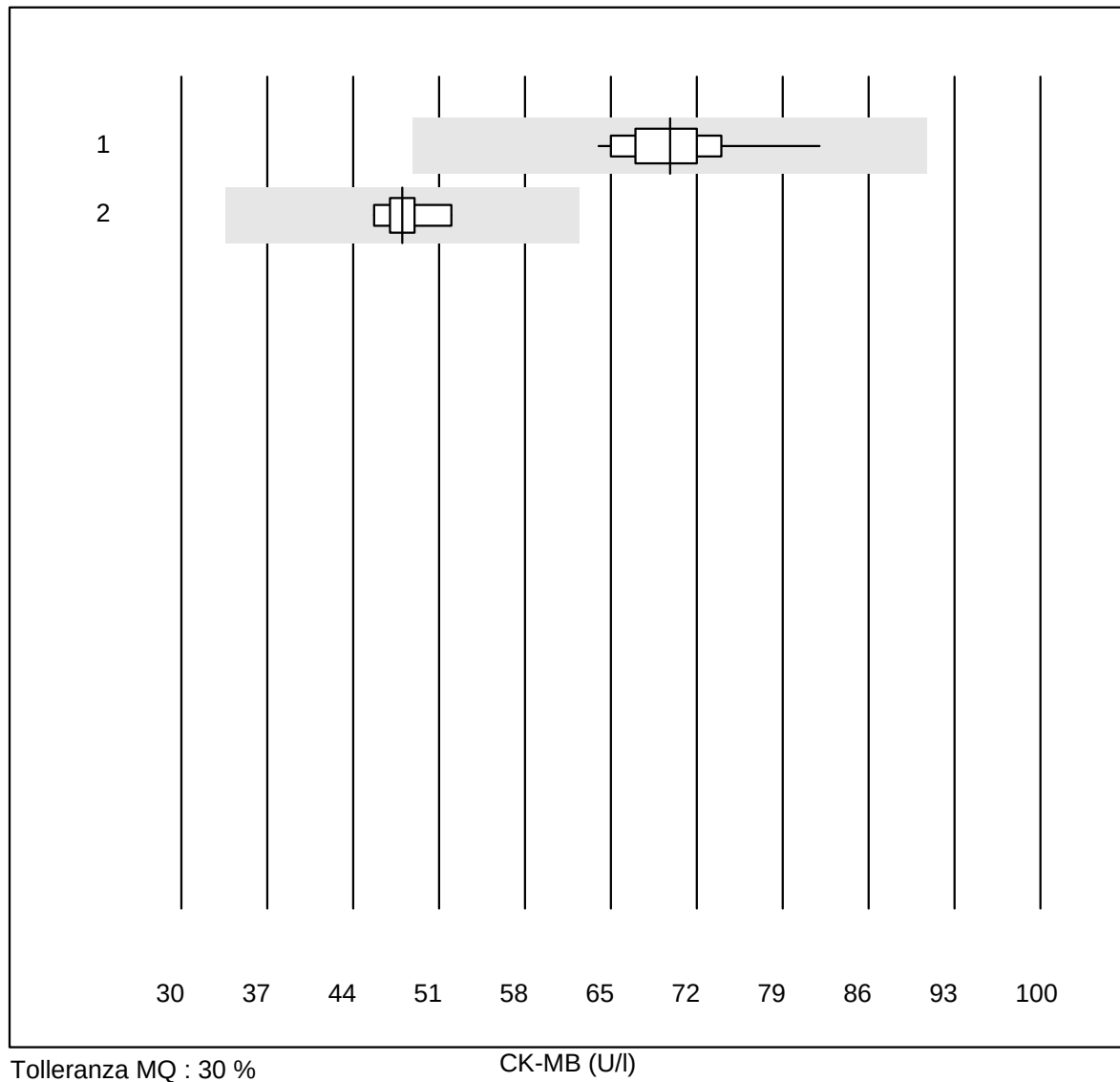CK-MB

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	17	100.0	0.0	0.0	69.8	6.0	e
2 Cobas/Roche	7	100.0	0.0	0.0	48.0	4.0	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


Peptide C

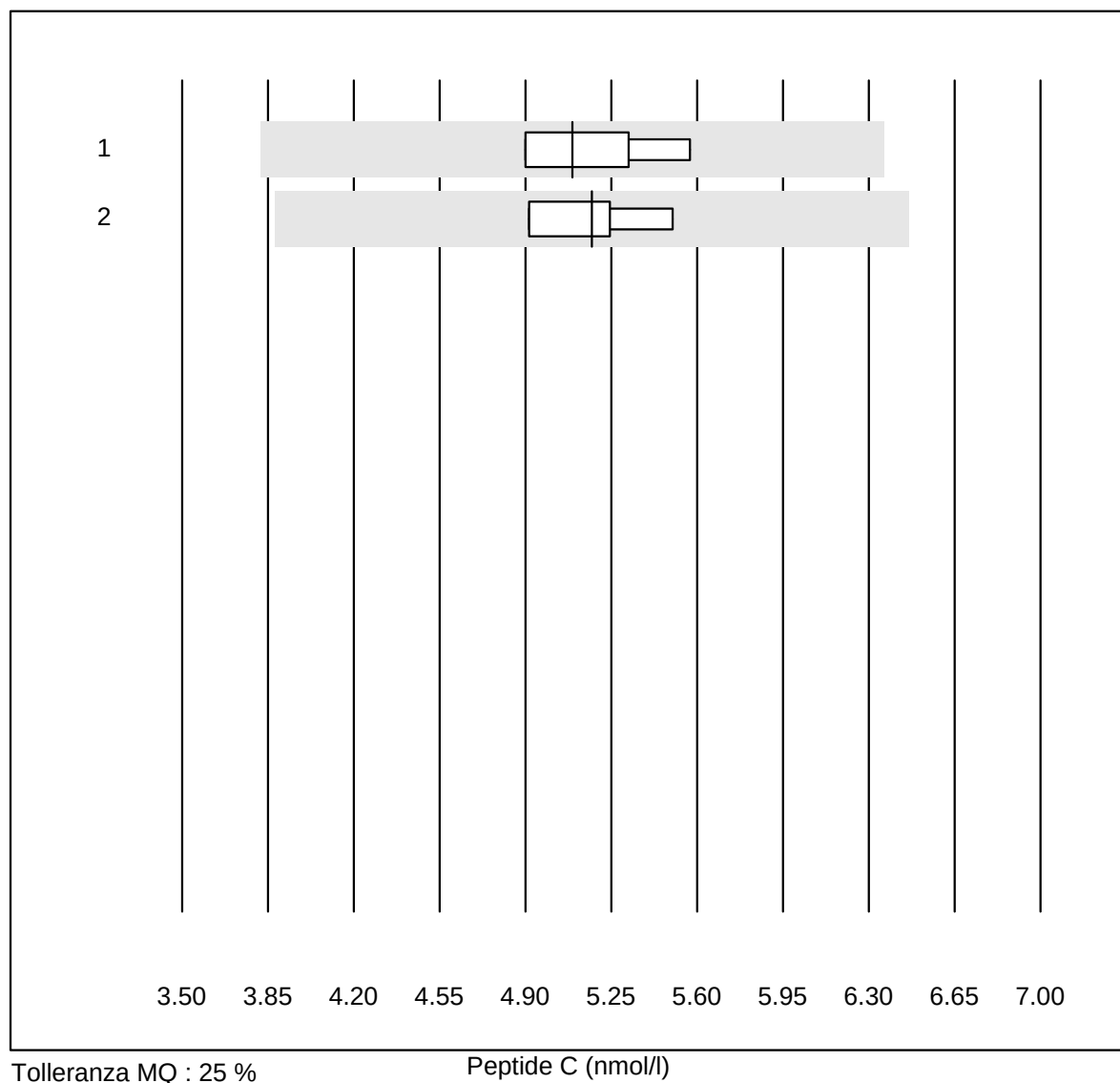

Tolleranza MQ : 25 %

Peptide C (nmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	5.09	4.6	e
2	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	5.17	4.7	e

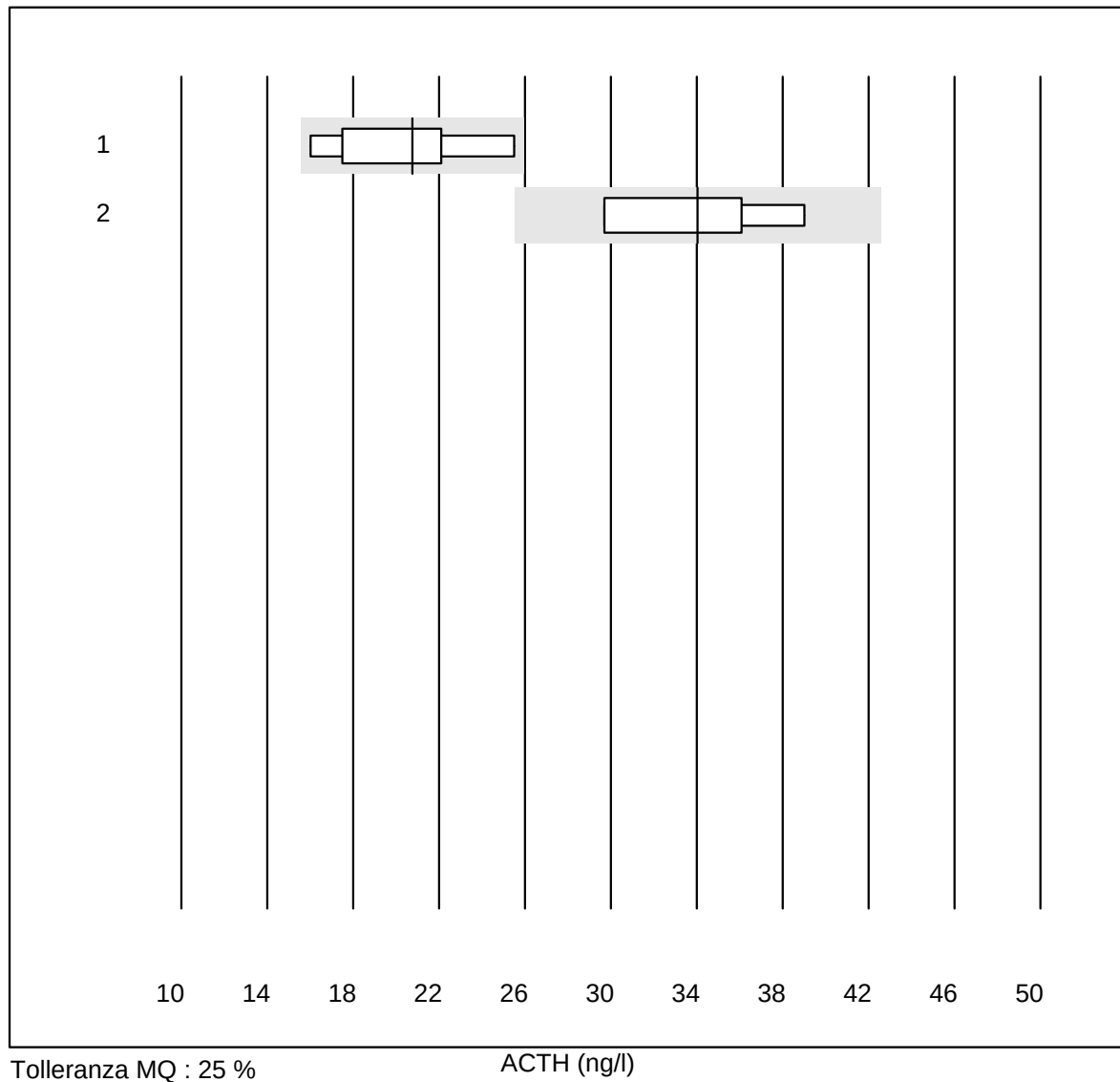ACTH


Tolleranza MQ : 25 %

ACTH (ng/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	20.75	15.2	a
2	Liaison	4	100.0	0.0	0.0	34.05	12.1	e*

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Procalcitonina

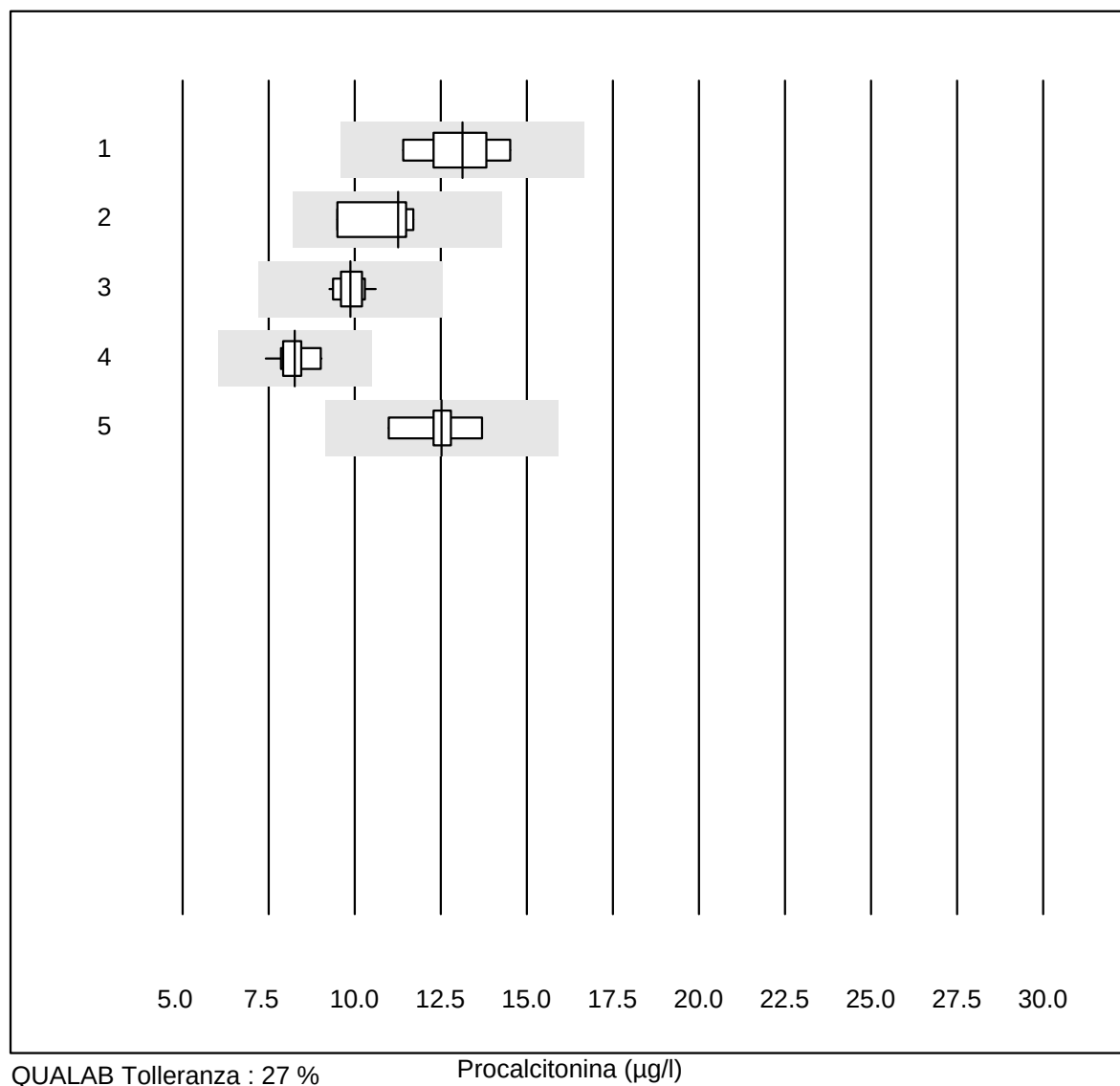


QUALAB Tolleranza : 27 %

Procalcitonina (µg/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	13.12	9.4	e*
2	Kryptor	4	100.0	0.0	0.0	11.25	9.1	e*
3	Cobas	21	100.0	0.0	0.0	9.88	3.9	e
4	VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	8.26	5.4	e
5	ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	12.53	7.0	e


6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

EPO

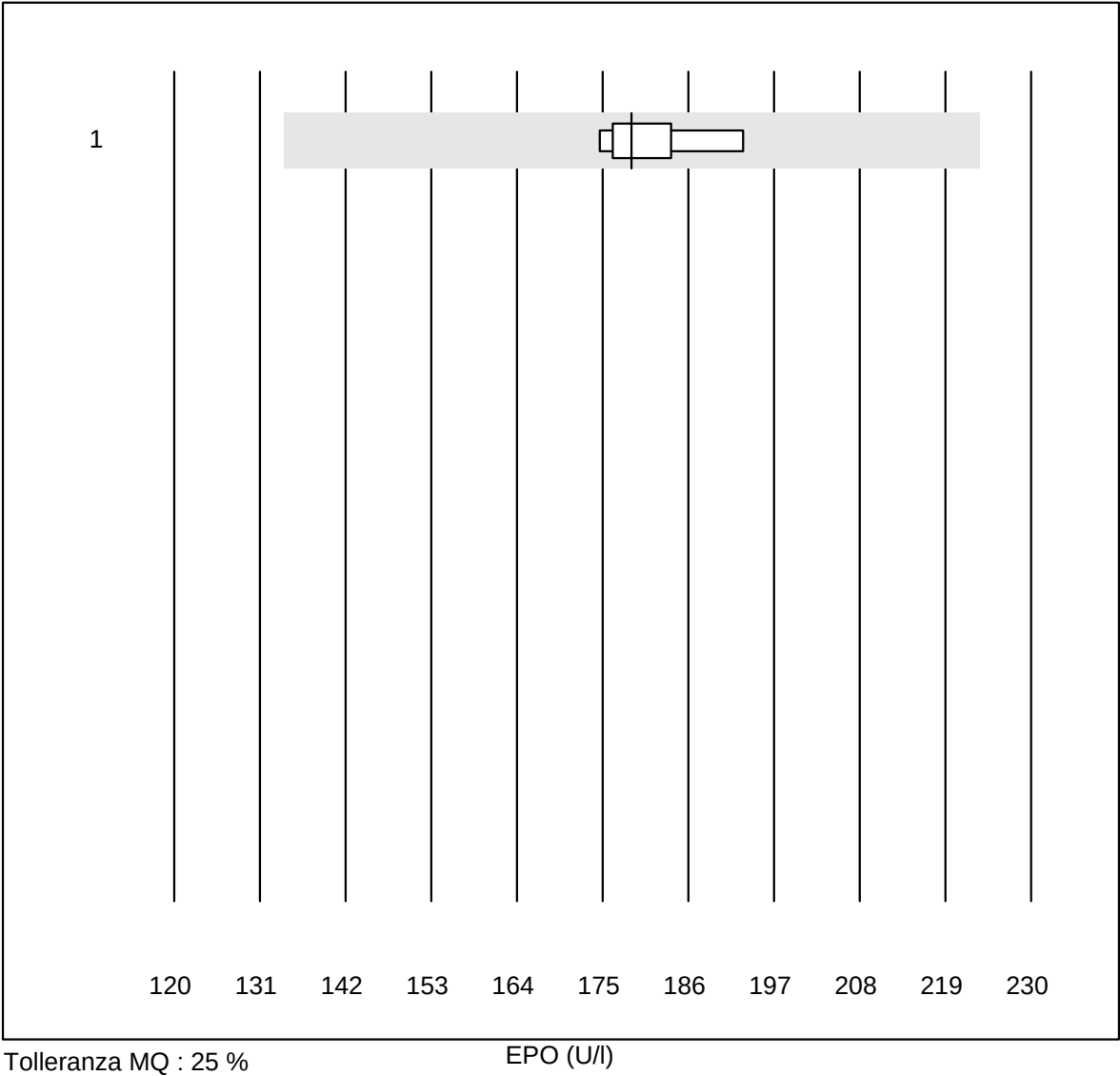

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	178.7	4.1	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Paratormone

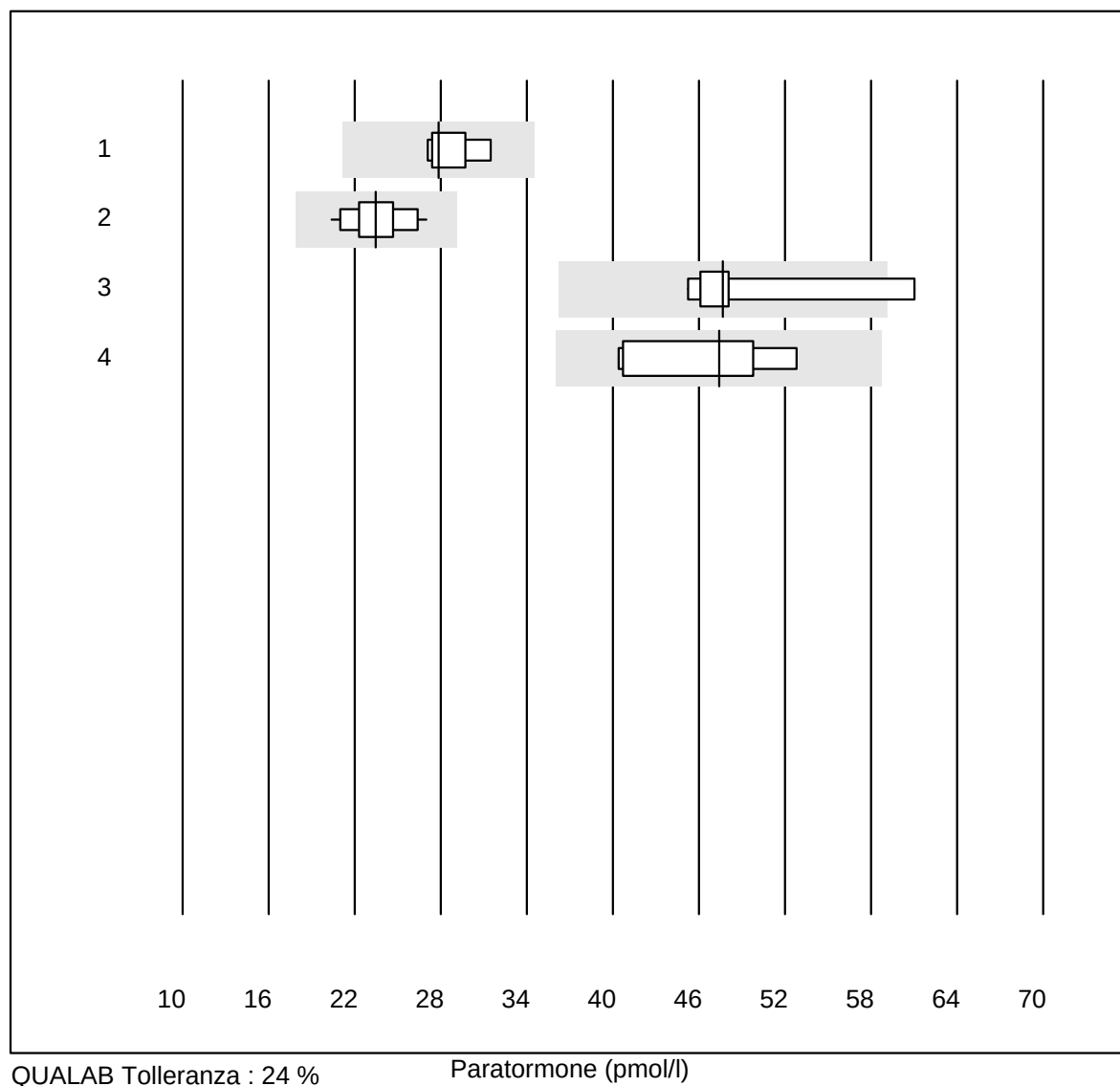


QUALAB Tolleranza : 24 %

Paratormone (pmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas PTH STAT	6	100.0	0.0	0.0	27.9	6.0	e
2	Cobas	17	100.0	0.0	0.0	23.5	8.3	e
3	Abbott	6	66.6	16.7	16.7	47.7	13.1	e*
4	ADVIA Centaur XP/CP	6	100.0	0.0	0.0	47.4	11.0	e*


4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Osmolalità

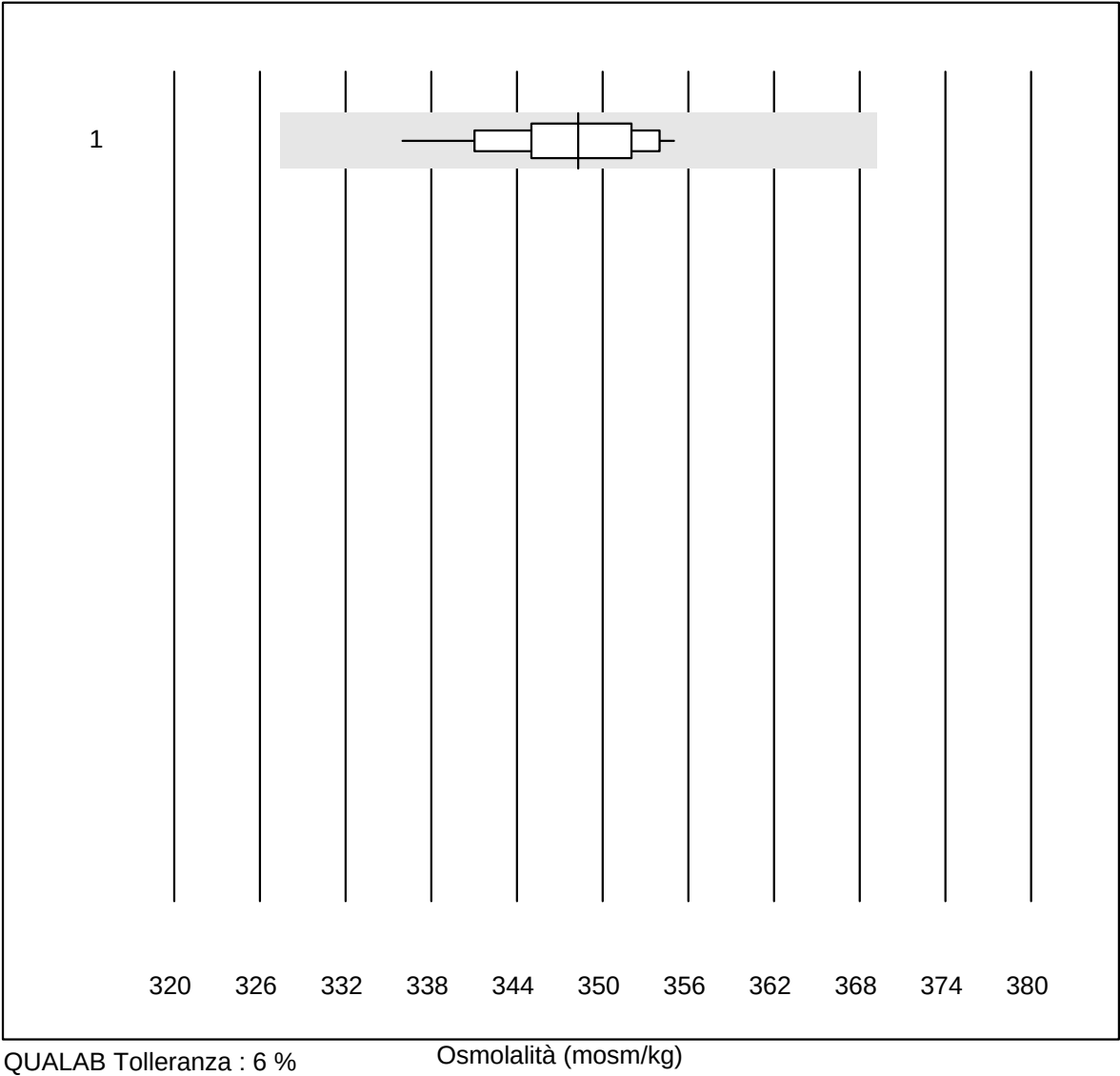

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Crioscopia	24	100.0	0.0	0.0	348	1.4	e

Potassio-K22

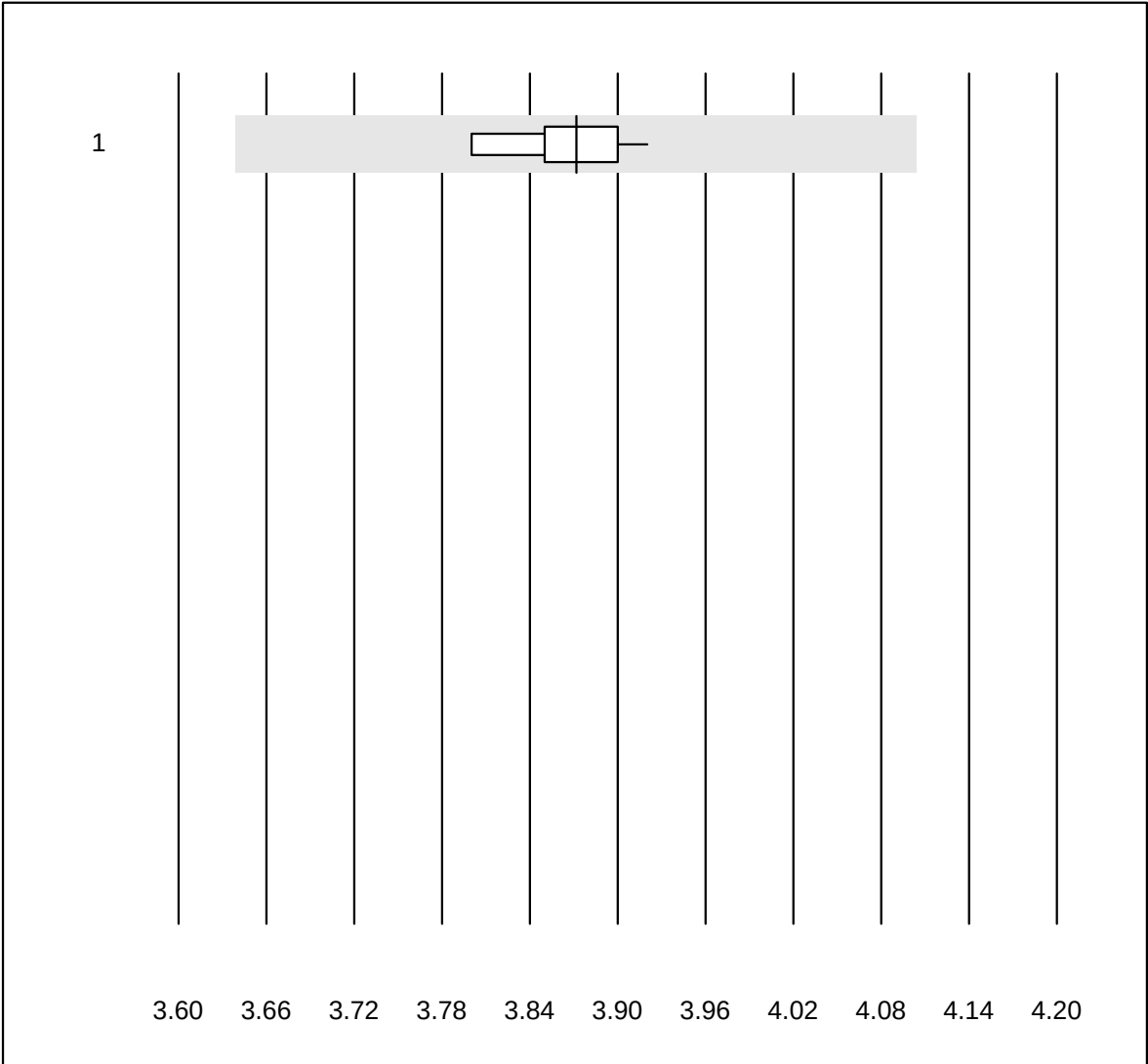


QUALAB Tolleranza : 6 %

Potassio-K22 (mmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 ISE	11	100.0	0.0	0.0	3.9	1.1	e

Sodio-K22

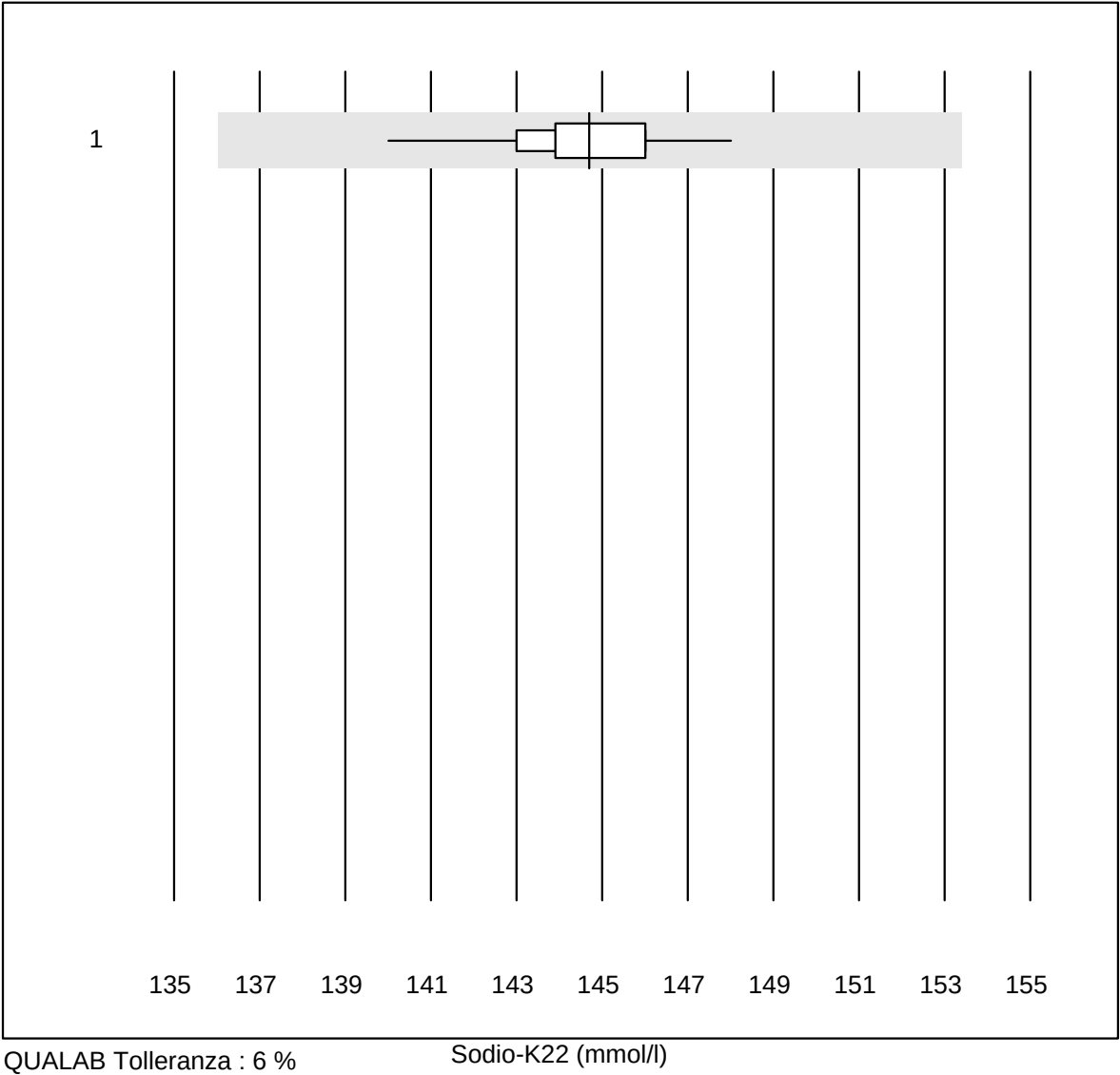

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	ISE	11	100.0	0.0	0.0	145	1.4	e

Glucosio-K22

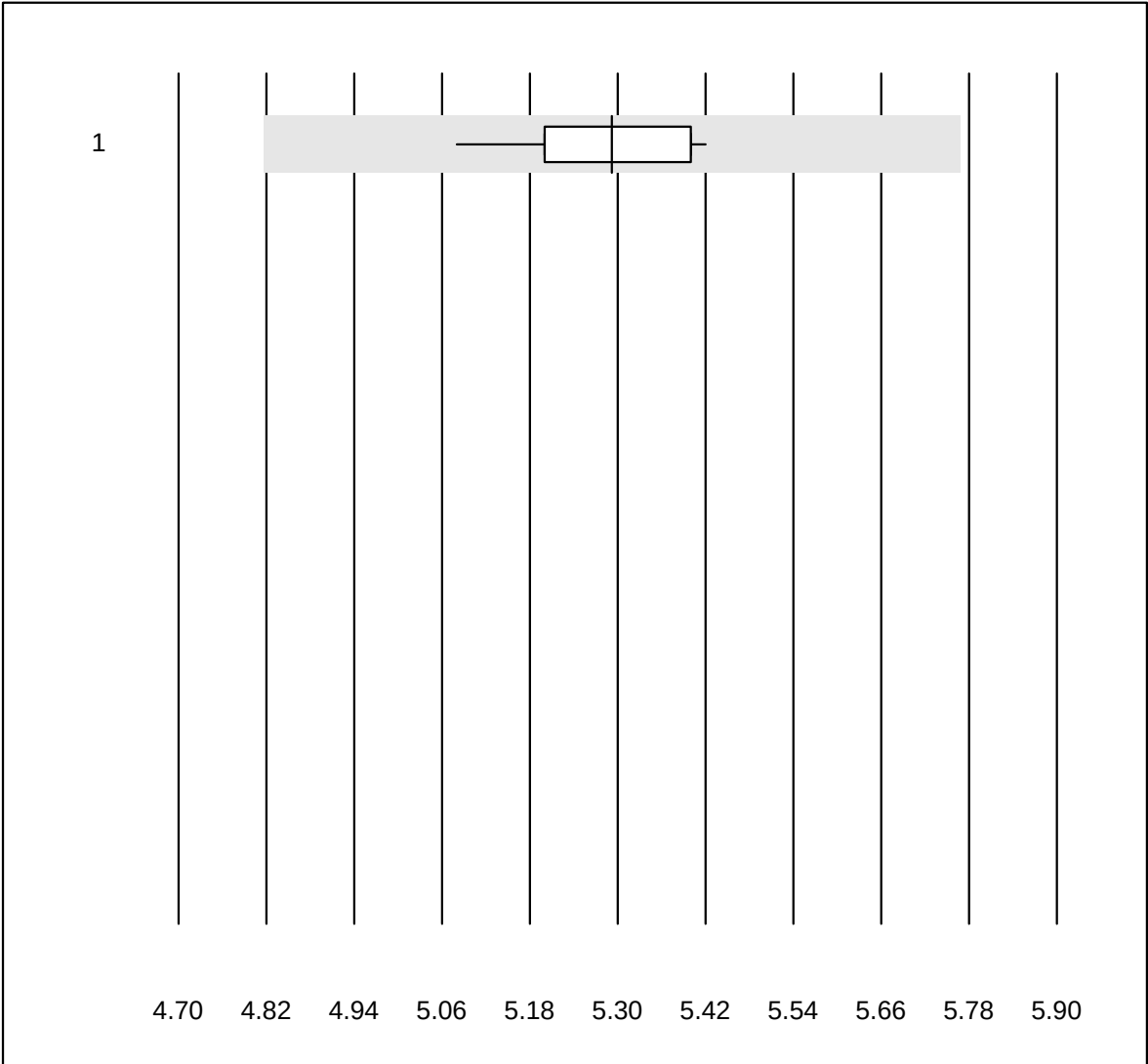


QUALAB Tolleranza : 9 %

Glucosio-K22 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	5.3	2.1	e

Urea-K22

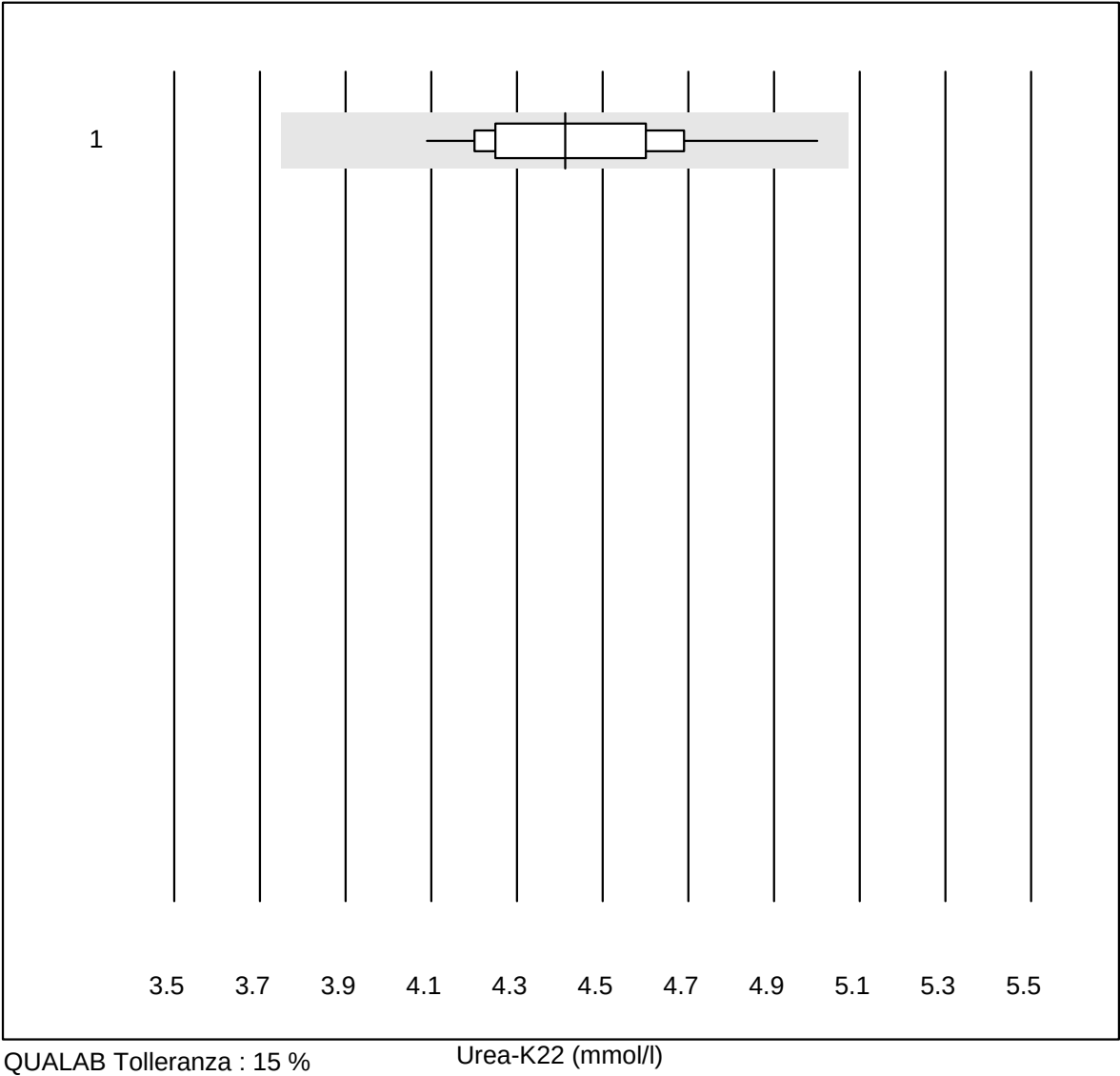


QUALAB Tolleranza : 15 %

Urea-K22 (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Chimica umida	11	100.0	0.0	0.0	4.4	5.9	e

Gap osmotico

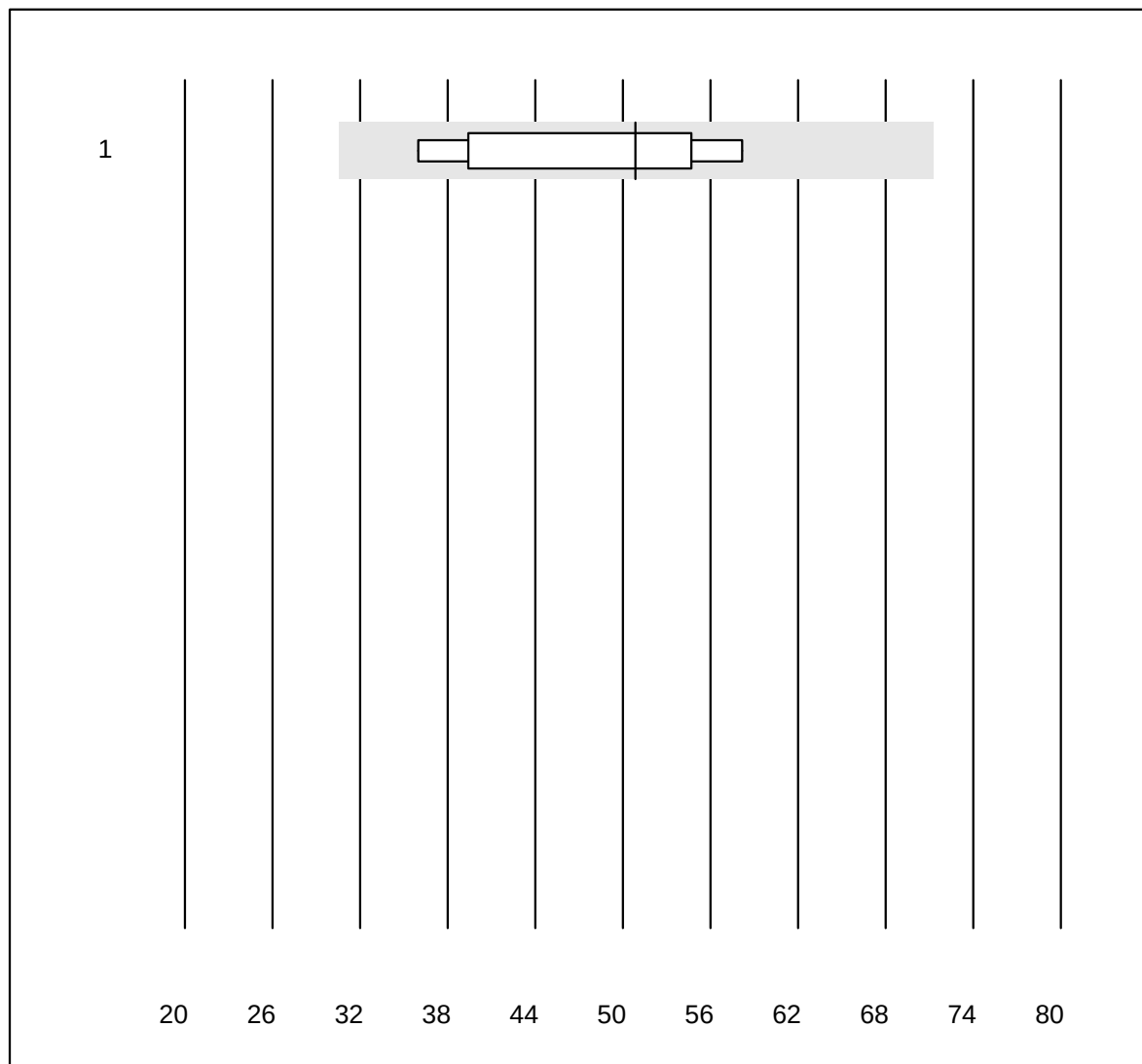


Tolleranza MQ : 40 %

Gap osmotico (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Formel 1 (2Na+K+Glu+	8	100.0	0.0	0.0	50.9	16.3	e*
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Digoxina

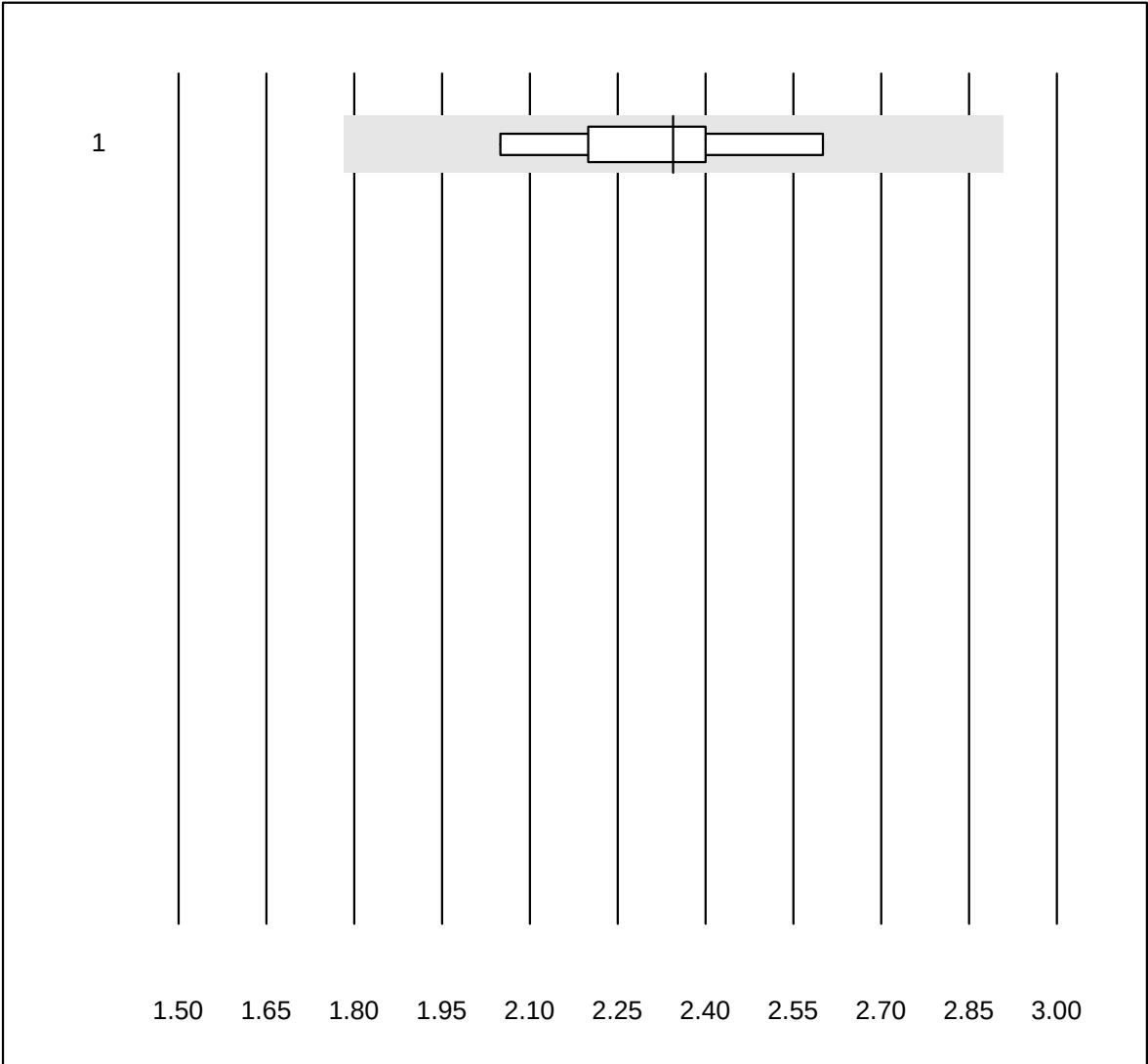


QUALAB Tolleranza : 24 %

Digoxina (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	2.35	7.1	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Paracetamolo

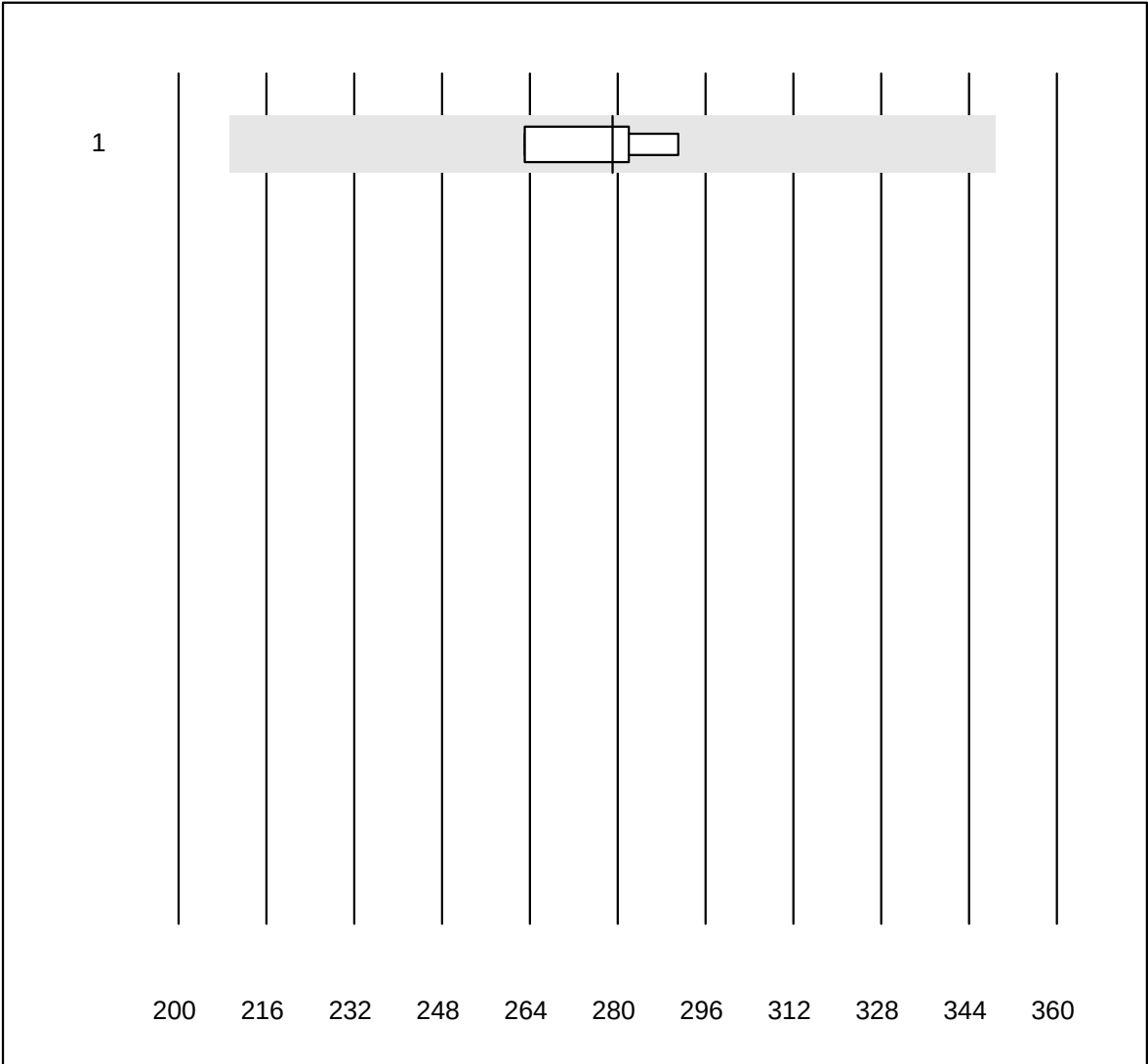

Tolleranza MQ : 25 % Paracetamolo (µmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	4	100.0	0.0	0.0	279.0	4.2	e
Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)							

Vancomicina

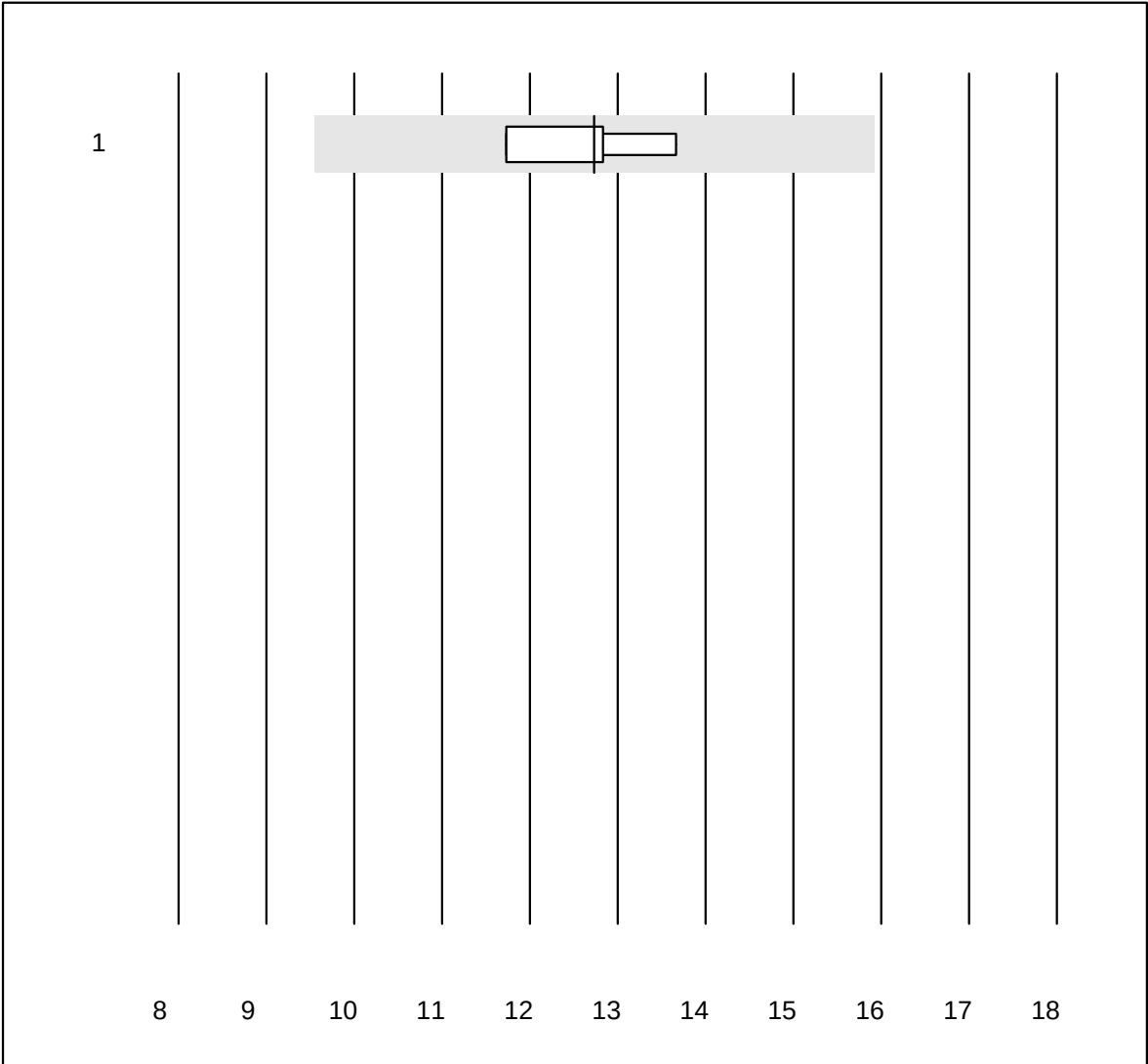


Tolleranza MQ : 25 %

Vancomicina (μmol/l)

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	4	100.0	0.0	0.0	12.7	6.2	e*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Valproato

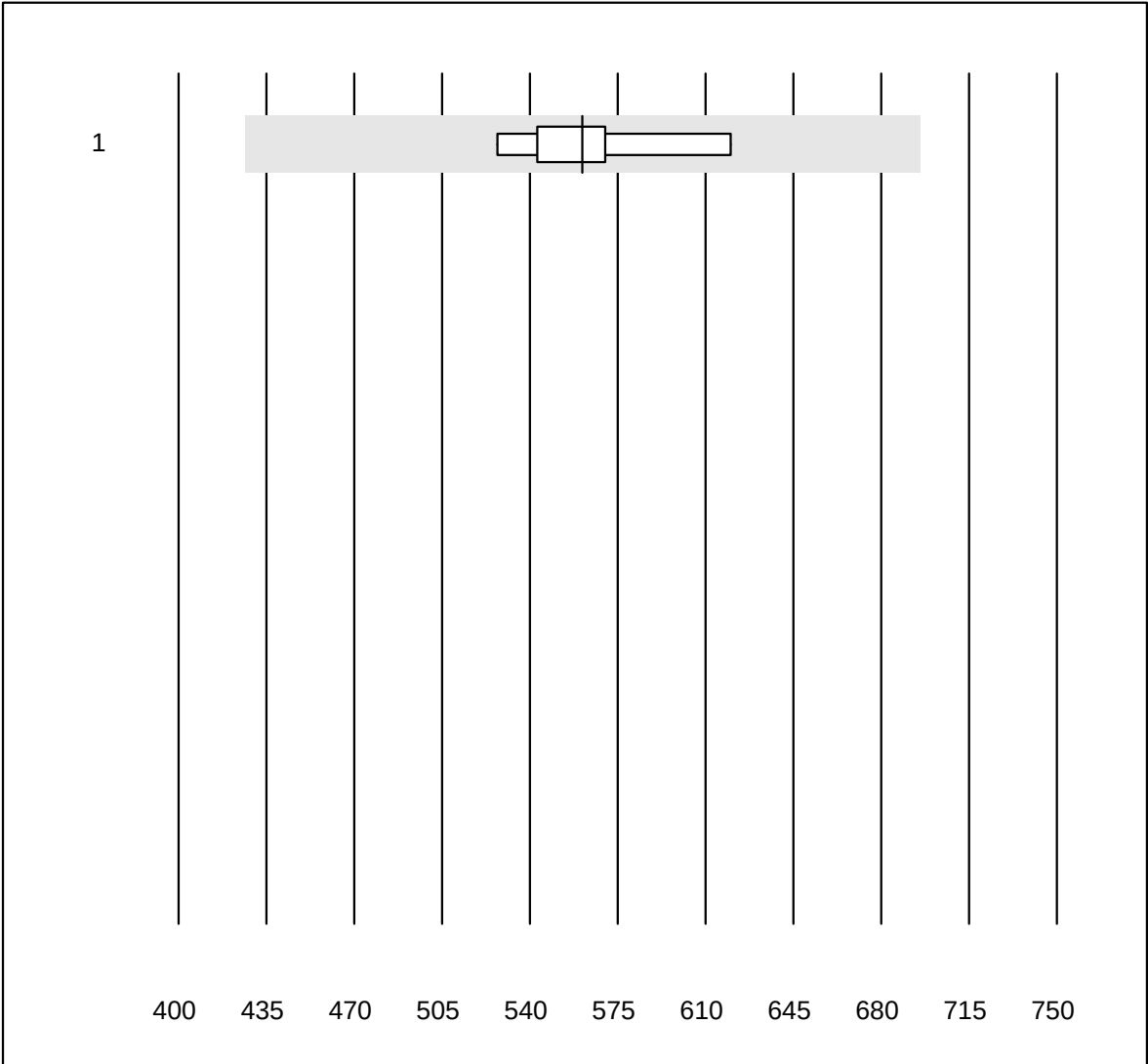


Tolleranza MQ : 24 %

Valproato (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	8	100.0	0.0	0.0	561.0	4.9	e

Cistatina C

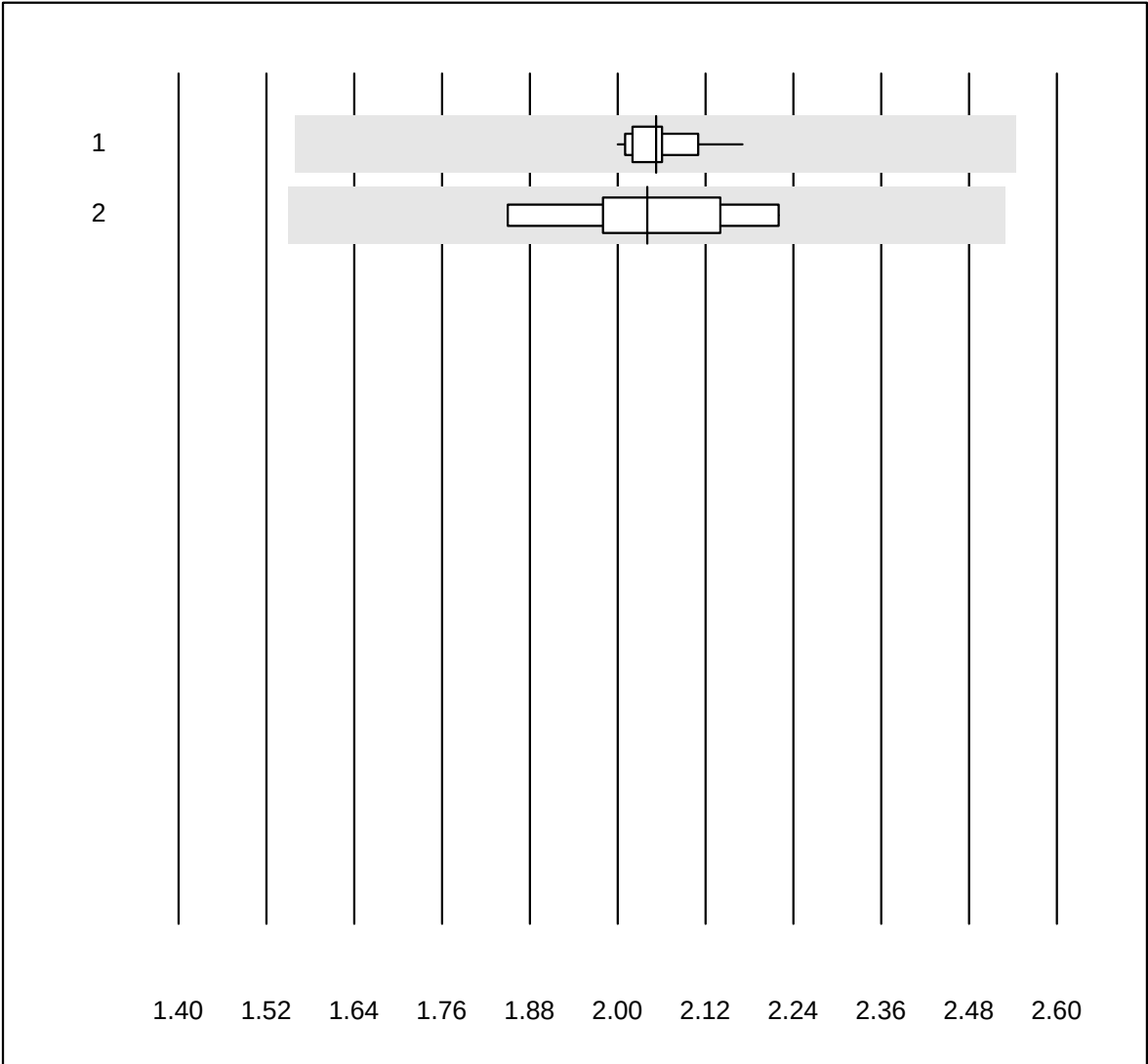


Tolleranza MQ : 24 %

Cistatina C (mg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	2.05	2.2	e
2	Nefelometria	6	100.0	0.0	0.0	2.04	6.5	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Etanolo

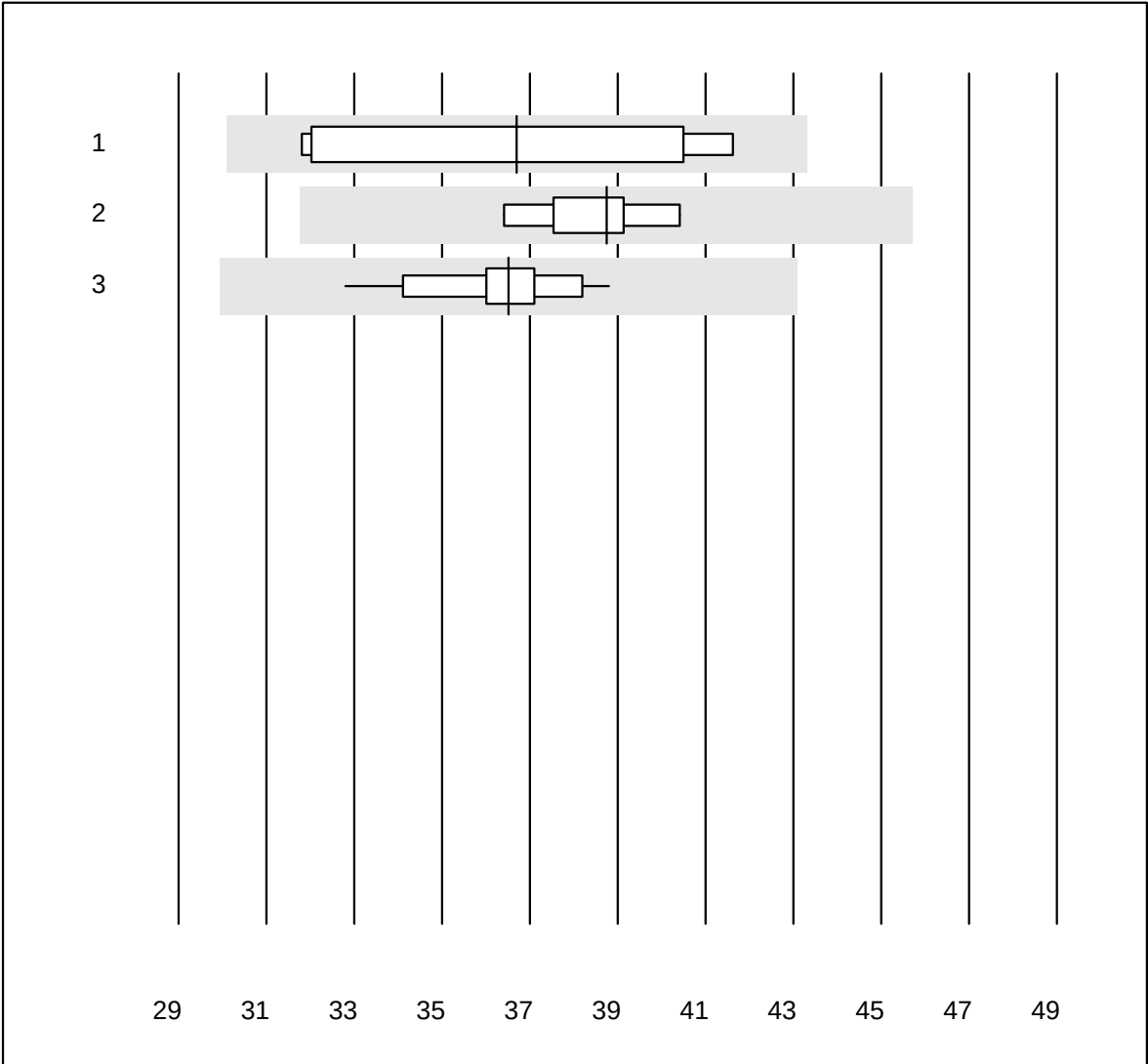


QUALAB Tolleranza : 18 %

Etanolo (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Altri	8	75.0	0.0	25.0	36.7	12.9	a
2	Abbott	5	100.0	0.0	0.0	38.8	4.0	e
3	Roche	24	100.0	0.0	0.0	36.5	4.1	e


Ammoniaca

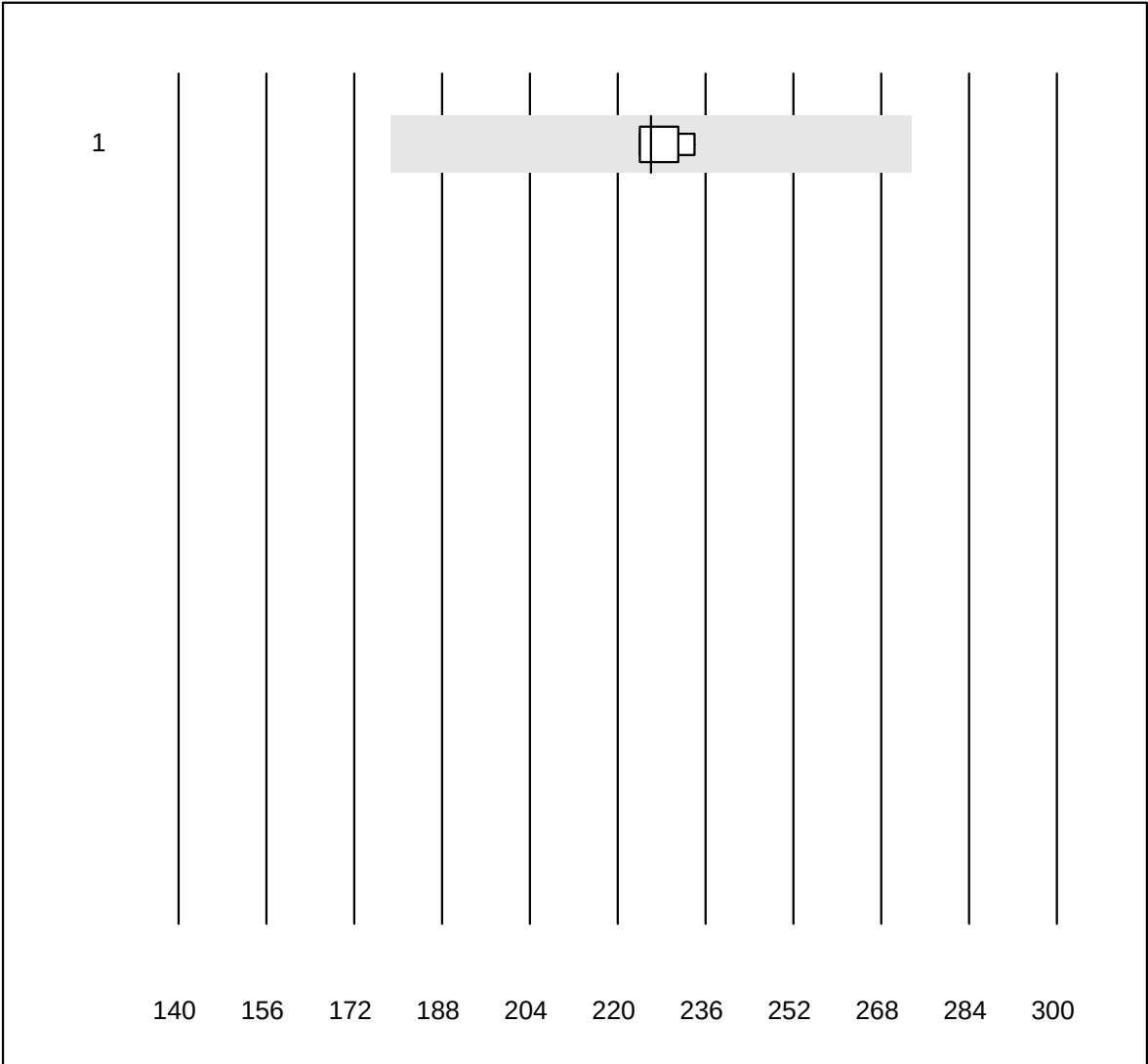

QUALAB Tolleranza : 21 % Ammoniaca (μmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	7	100.0	0.0	0.0	226.0	1.6	e
7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Calprotectina

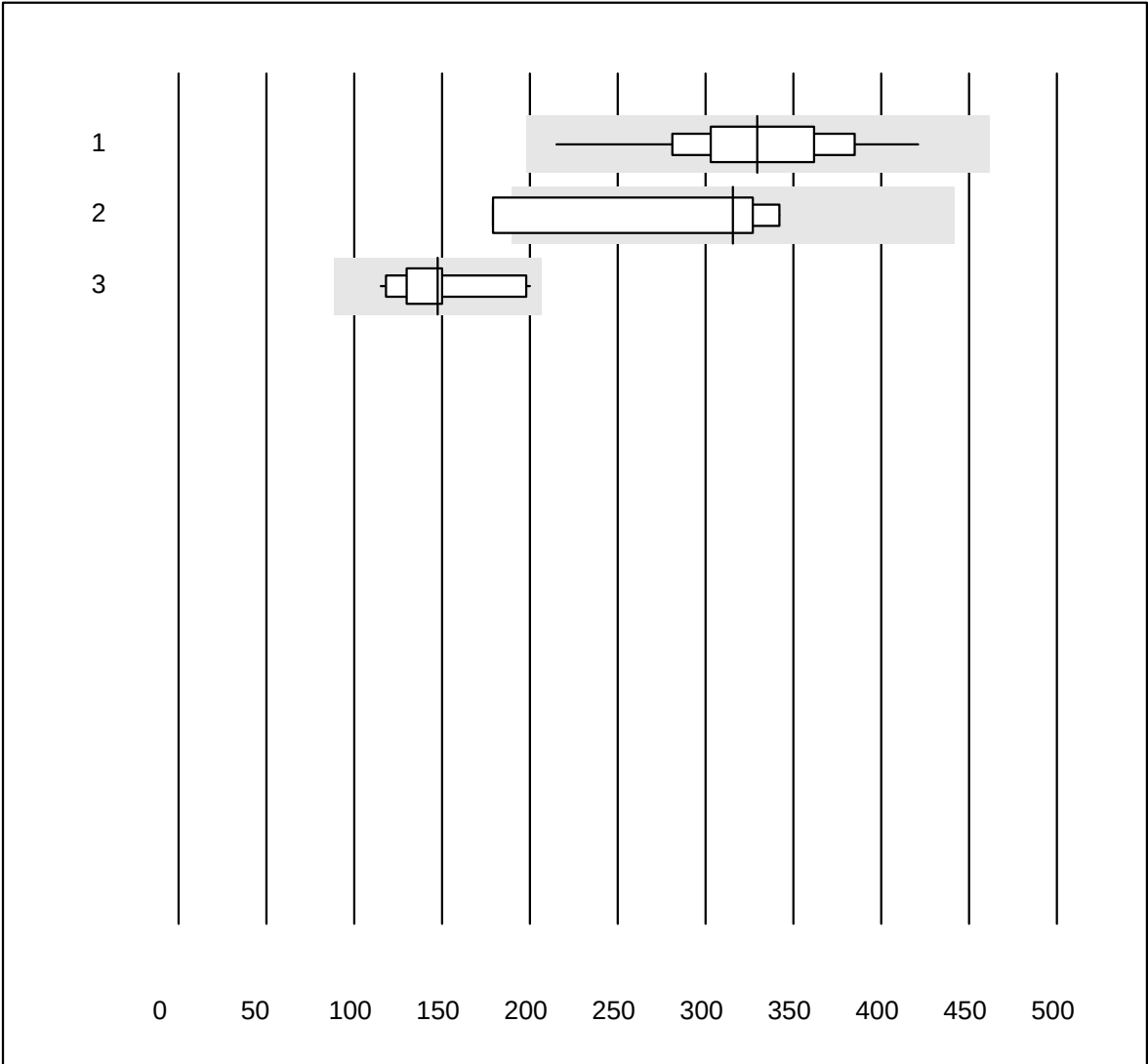


Tolleranza MQ : 40 %

Calprotectina (µg/g)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Bühlmann fCALturbo	20	95.0	0.0	5.0	330	13.7	e
2	Bühlmann Quantum Blu	4	75.0	25.0	0.0	316	25.8	e*
3	Liaison	13	100.0	0.0	0.0	148	17.8	e*
4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Colesterolo Af/b101

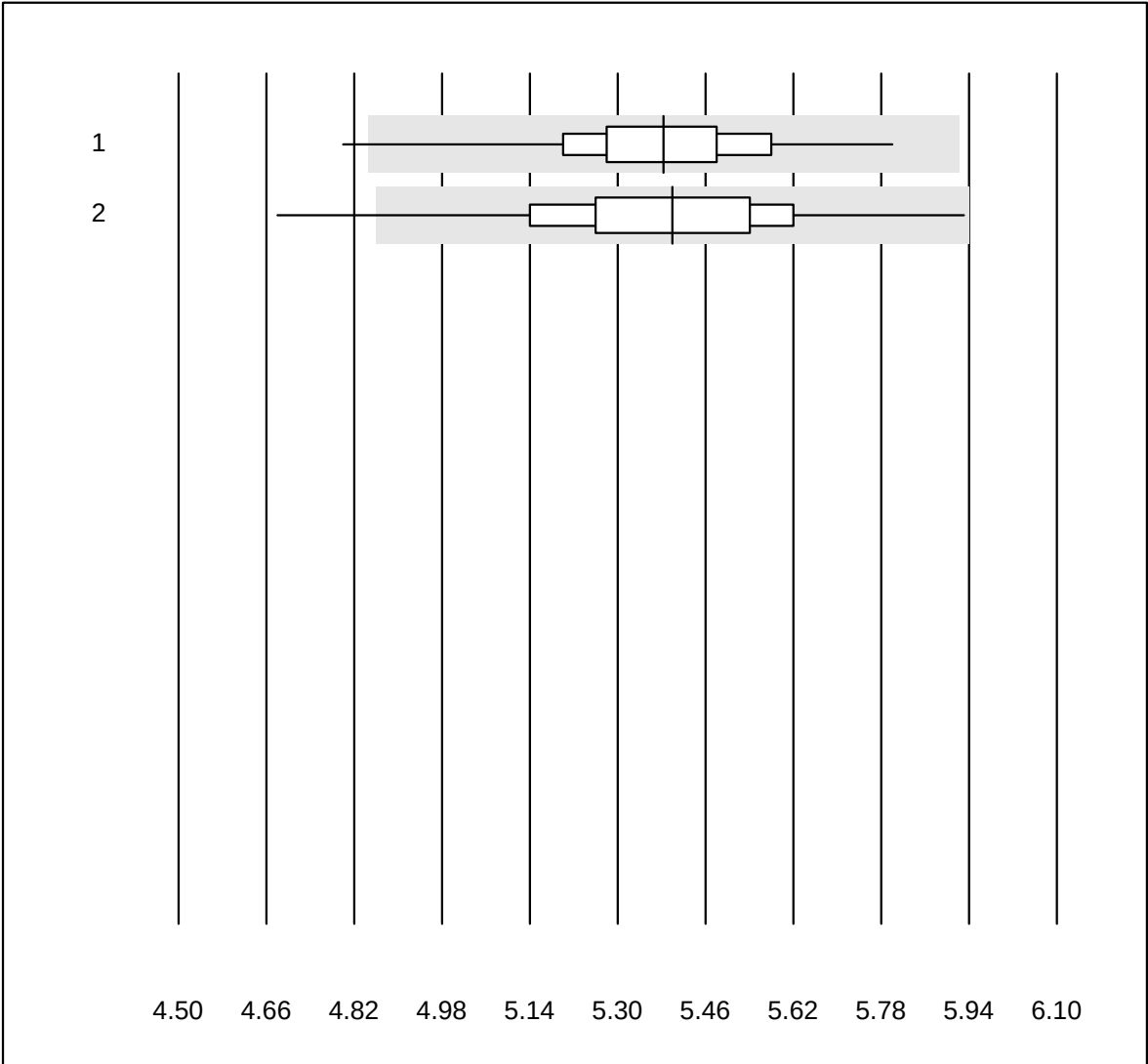


QUALAB Tolleranza : 10 %

Colesterolo Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	348	99.4	0.3	0.3	5.38	2.7	e
2 Afinion	461	97.3	0.7	2.0	5.40	3.7	e

Colesterolo HDL Af/b101

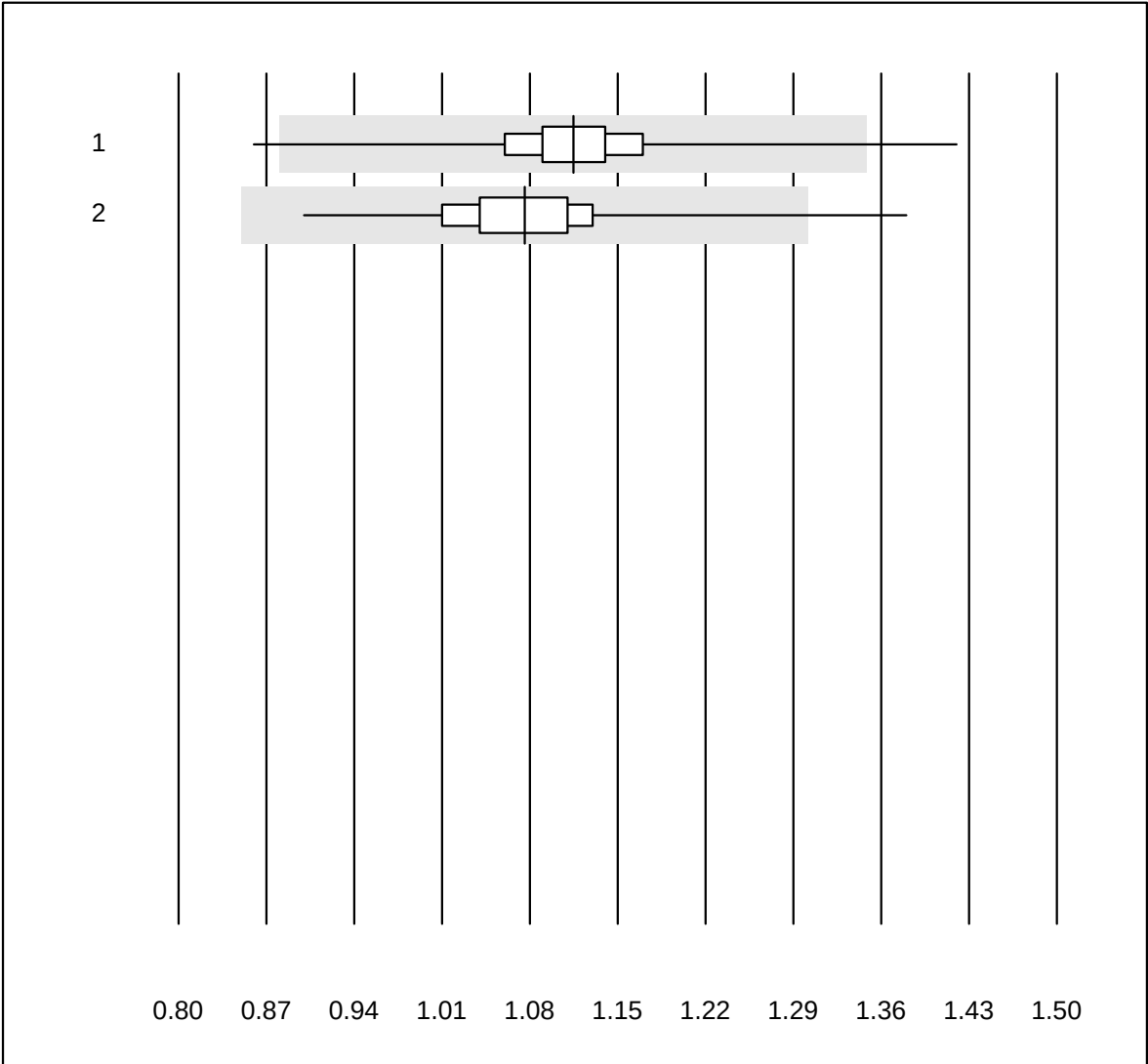


QUALAB Tolleranza : 21 %

Colesterolo HDL Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	346	91.3	0.6	8.1	1.11	4.0	e
2 Afinion	461	94.2	0.2	5.6	1.08	4.8	e


Trigliceridi Af/b101

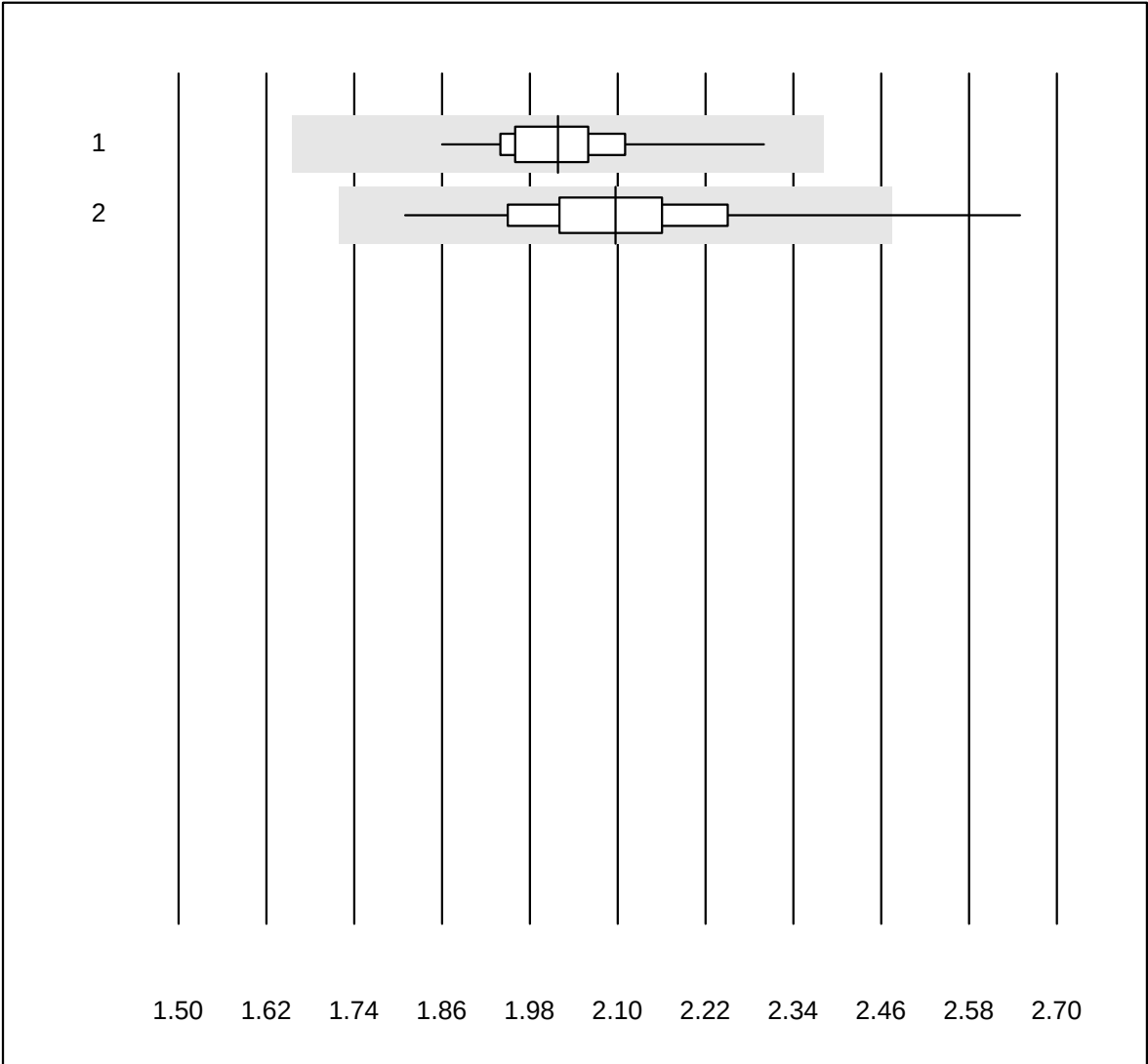

QUALAB Tolleranza : 18 % Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas b101	347	98.0	0.0	2.0	2.02	3.5	e
2 Afinion	461	97.4	1.1	1.5	2.10	5.8	e

Troponina I AFIAS

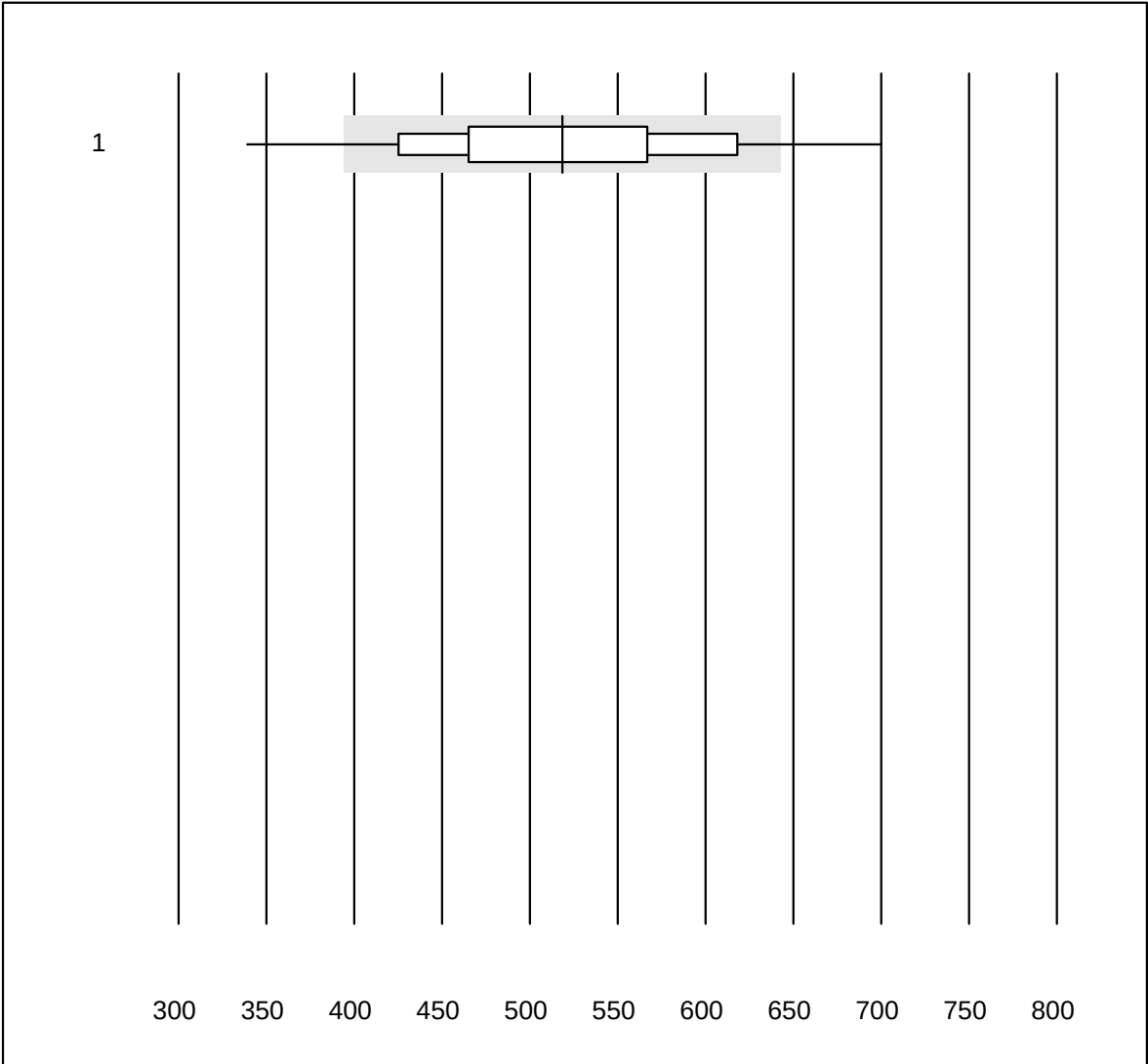


QUALAB Tolleranza : 24 %

Troponina I AFIAS (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	646	87.2	7.1	5.7	518.39	14.0	e

NT-proBNP AFIAS

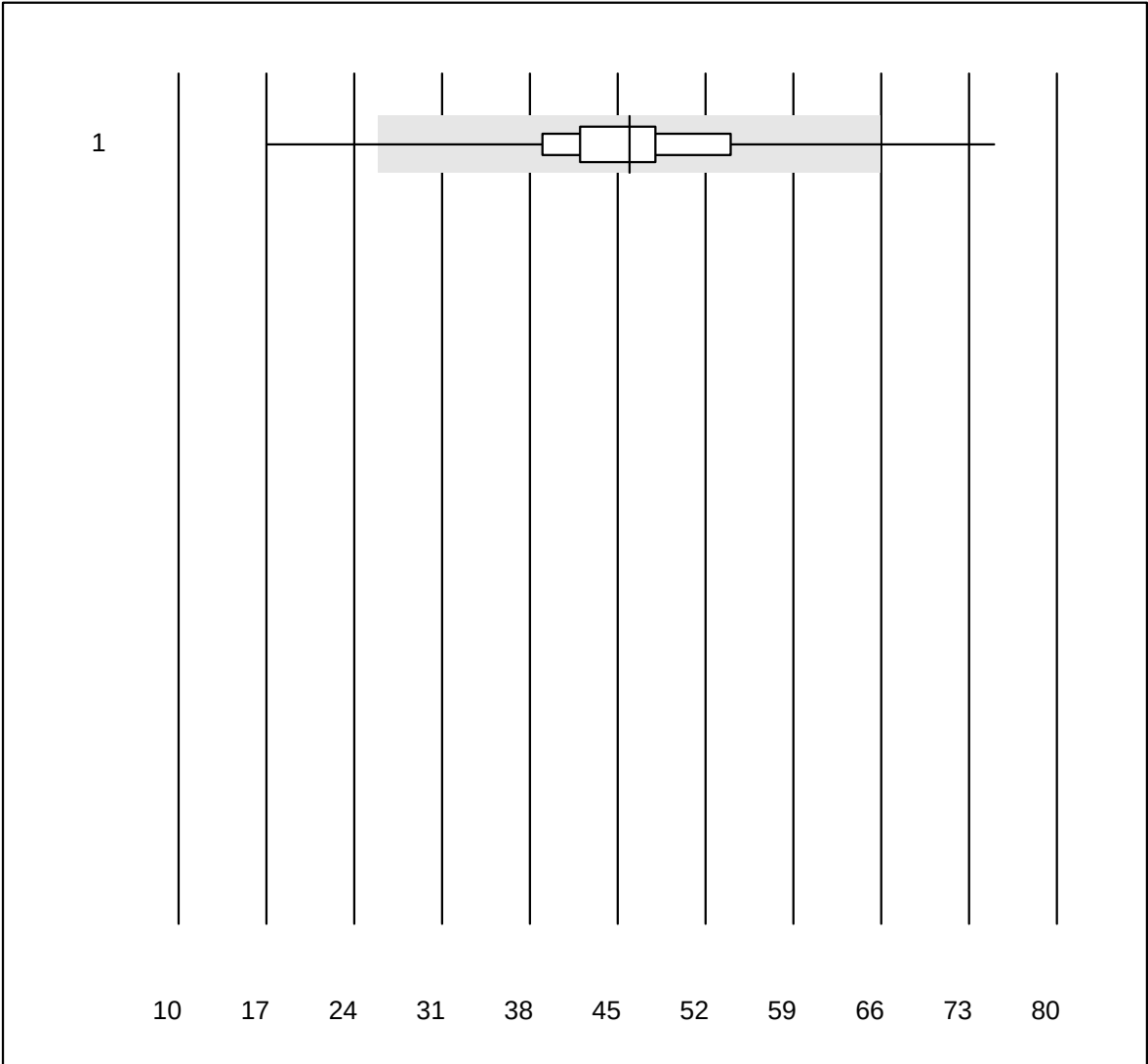


QUALAB Tolleranza : 27 %
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

NT-proBNP AFIAS (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 AFIAS	490	95.5	2.7	1.8	45.9	14.8	e

Omocisteina

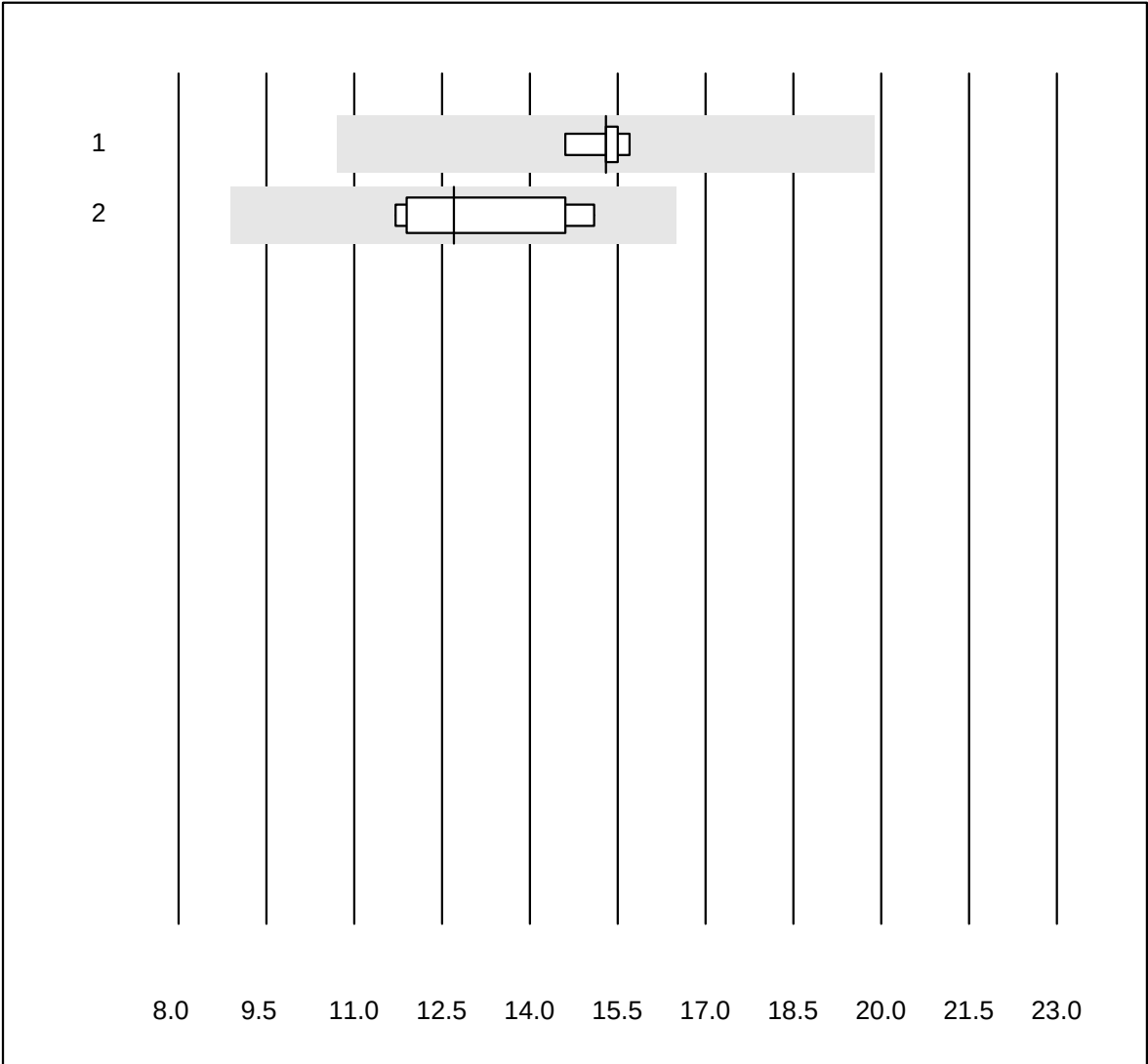


Tolleranza MQ : 30 %

Omocisteina (μmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	9	100.0	0.0	0.0	15.3	2.5	e
2	Abbott	7	100.0	0.0	0.0	12.7	10.5	e*


Lipasi

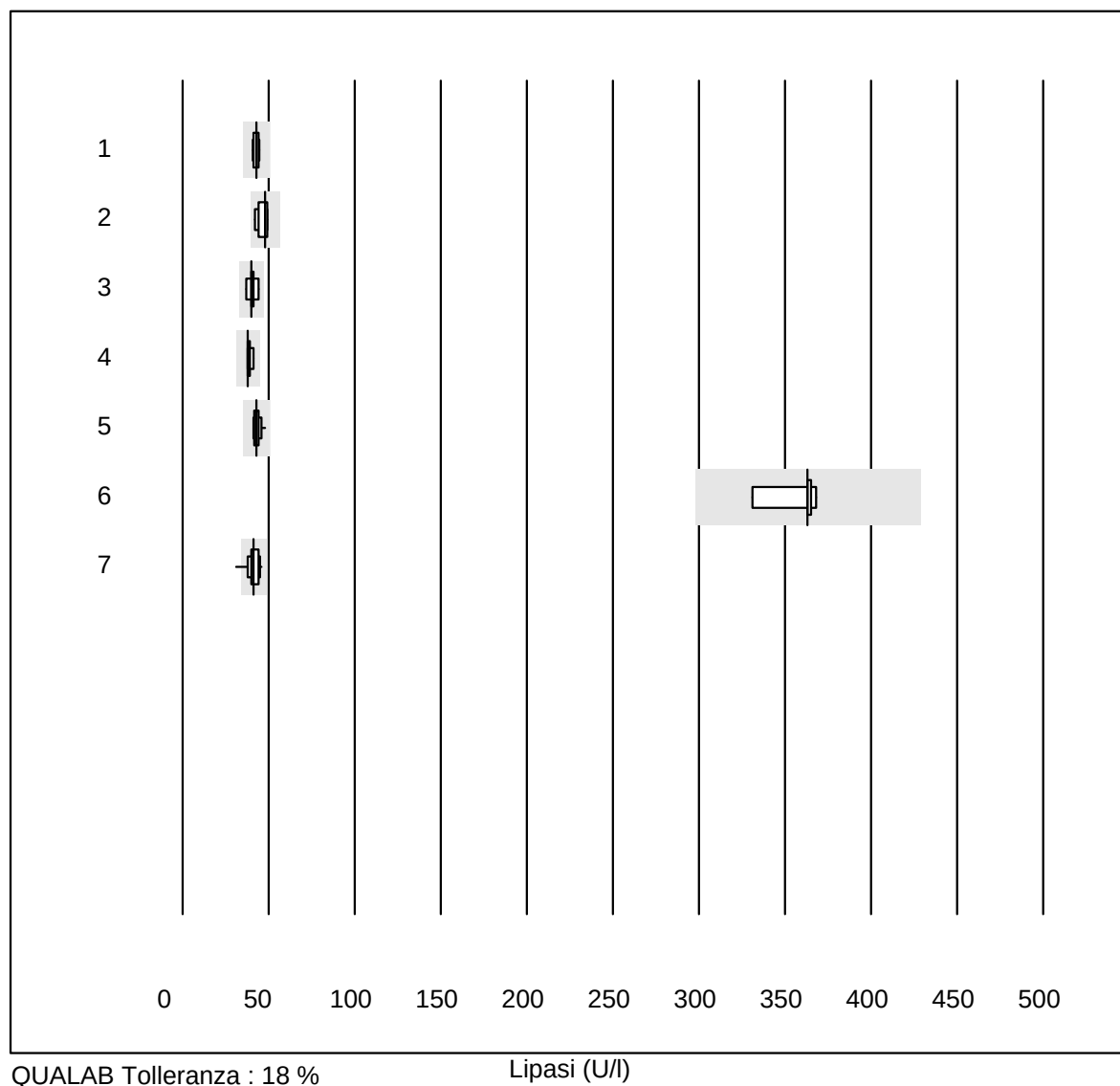

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	43.0	3.6	e
2	Siemens	7	100.0	0.0	0.0	48.0	6.0	e*
3	Abbott	9	100.0	0.0	0.0	40.0	5.1	e
4	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	38.0	3.4	e
5	Roche	25	100.0	0.0	0.0	42.9	4.2	e
6	Vitros	5	100.0	0.0	0.0	363.2	4.3	e
7	Fuji Dri-Chem	172	98.3	1.7	0.0	41.3	7.1	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)


Fructosamina

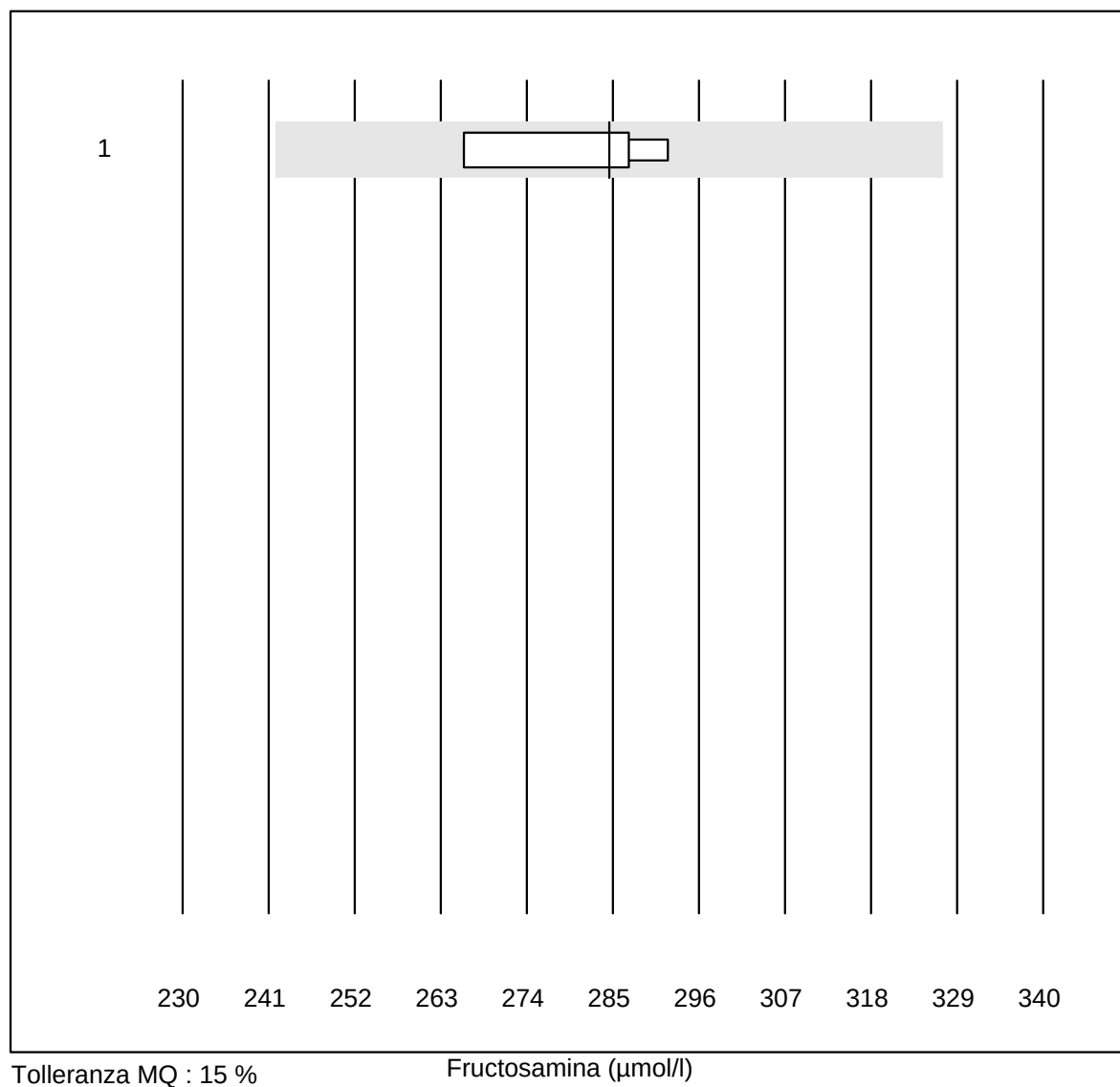

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	285	4.0	e*


Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

Bicarbonato

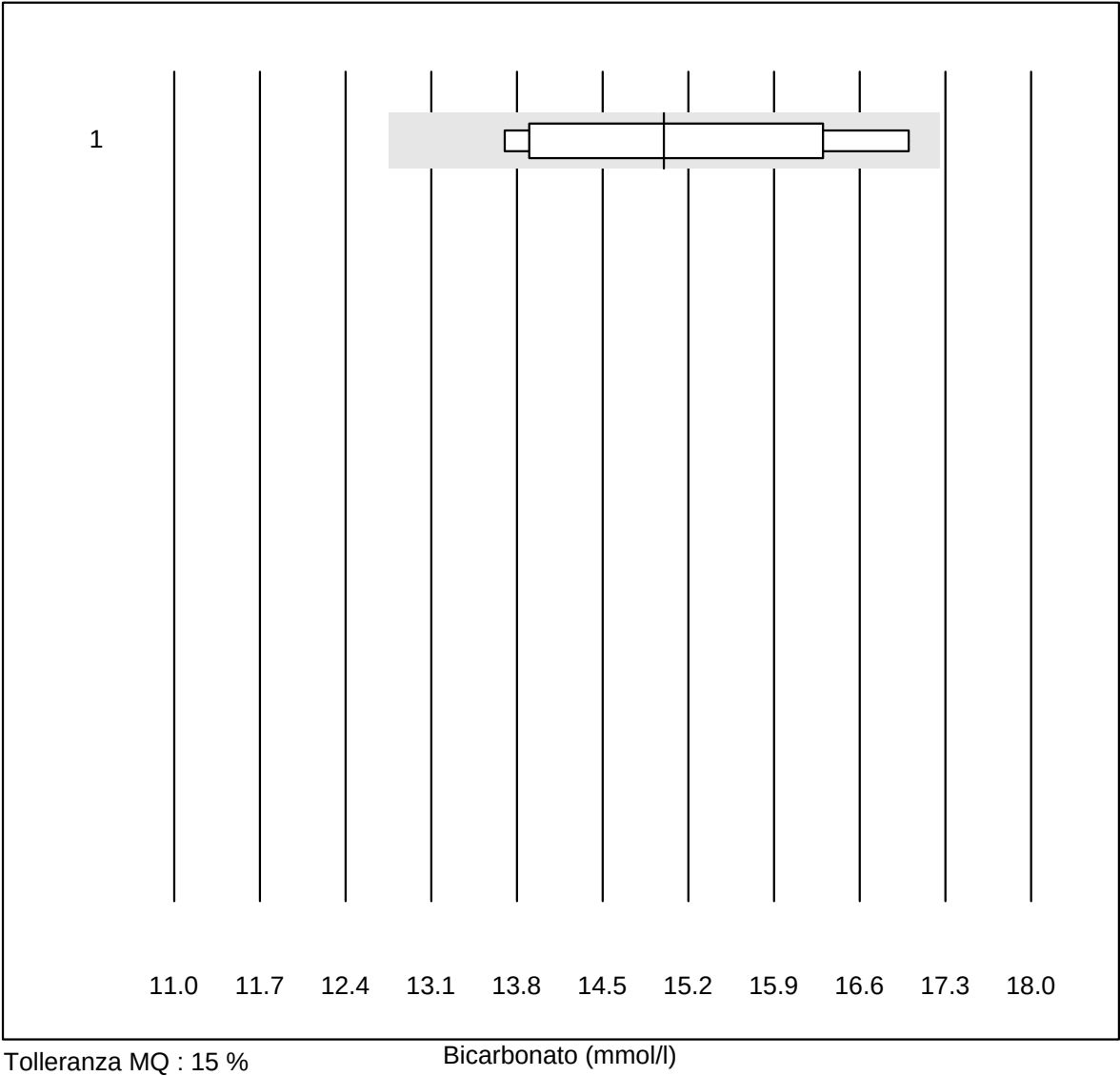

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	7	100.0	0.0	0.0	15.0	7.9	e*
5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Glucosio CSF

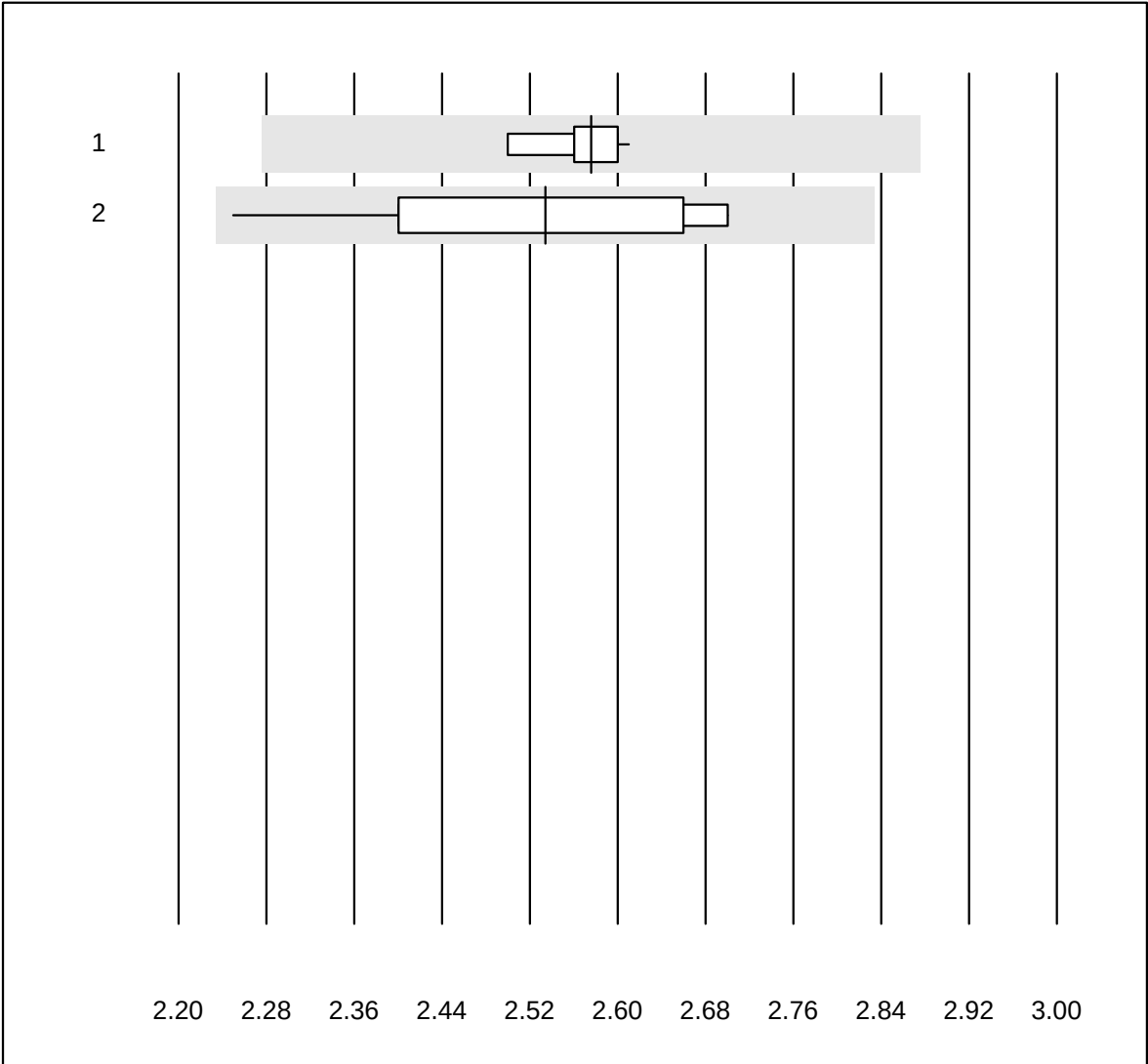


QUALAB Tolleranza : 9 %
(< 3.30: +/- 0.30 mmol/l)

Glucosio CSF (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	18	94.4	0.0	5.6	2.58	1.5	e
2	altri metodi	12	100.0	0.0	0.0	2.53	5.6	e*

Lattato CSF

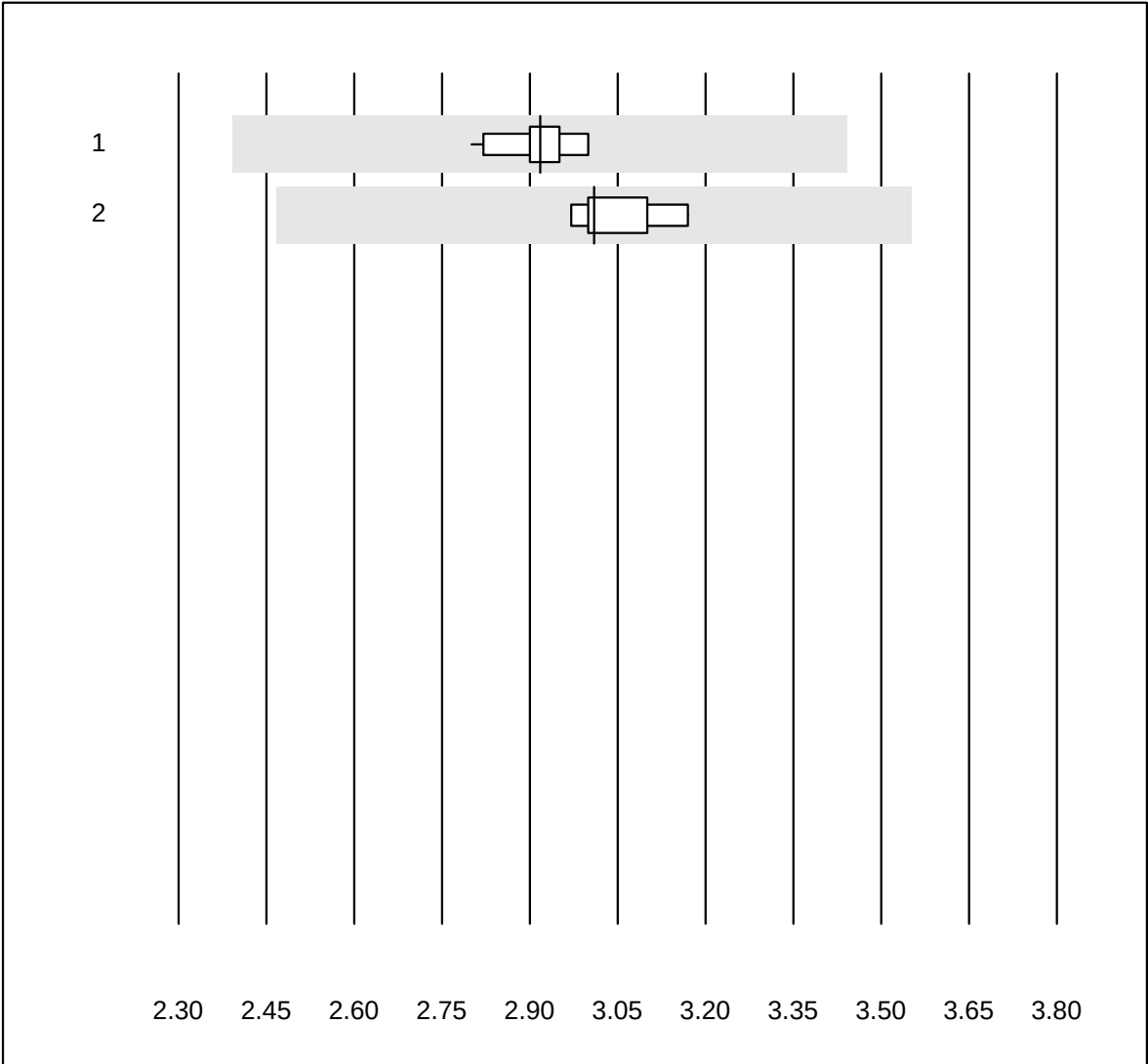


QUALAB Tolleranza : 18 %

Lattato CSF (mmol/l)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	2.92	2.0	e
2	altri metodi	7	100.0	0.0	0.0	3.01	2.4	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Proteine CSF

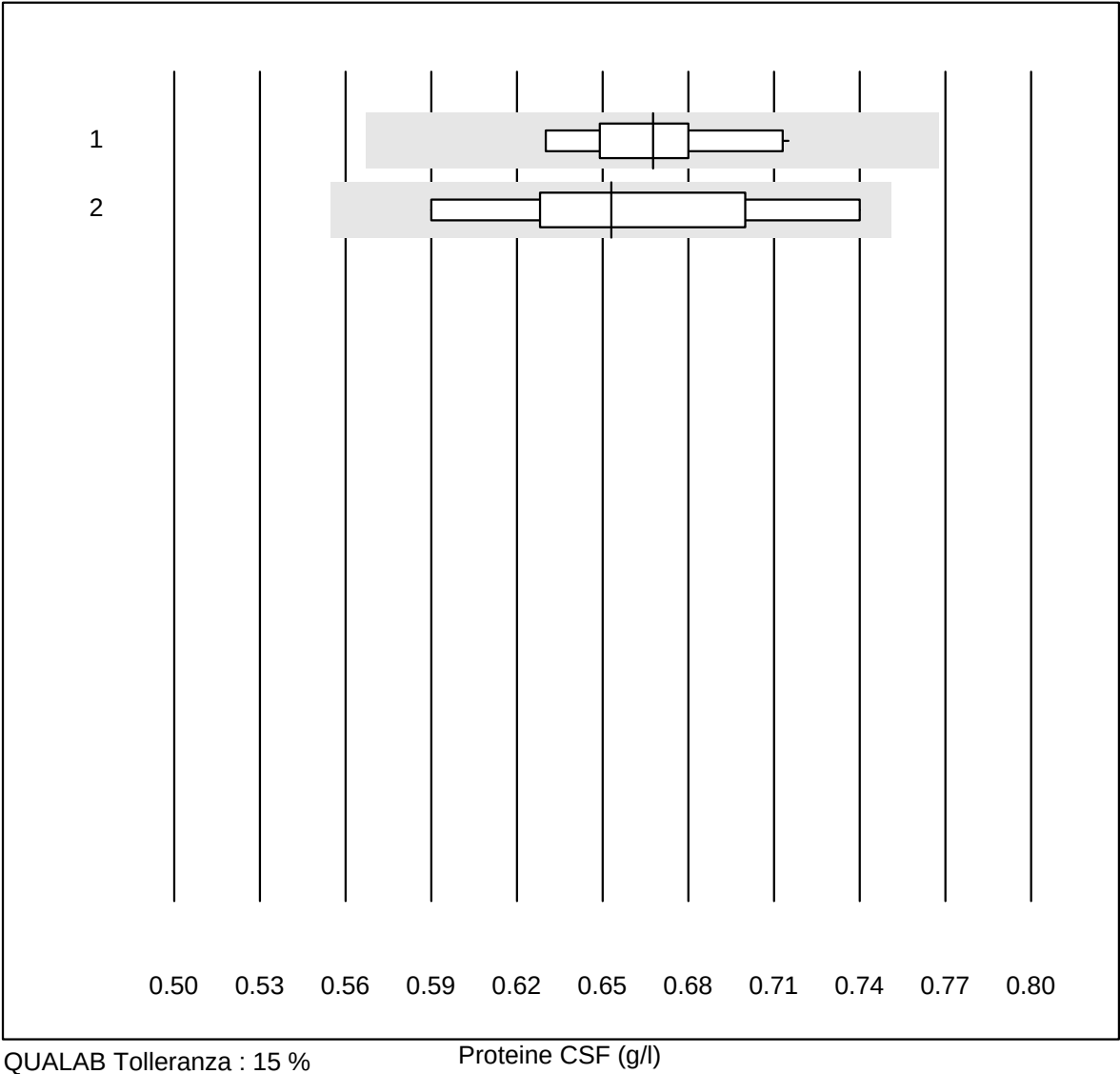


QUALAB Tolleranza : 15 %

Proteine CSF (g/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	20	95.0	0.0	5.0	0.67	3.6	e
2	altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	0.65	7.5	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

LDH CSF

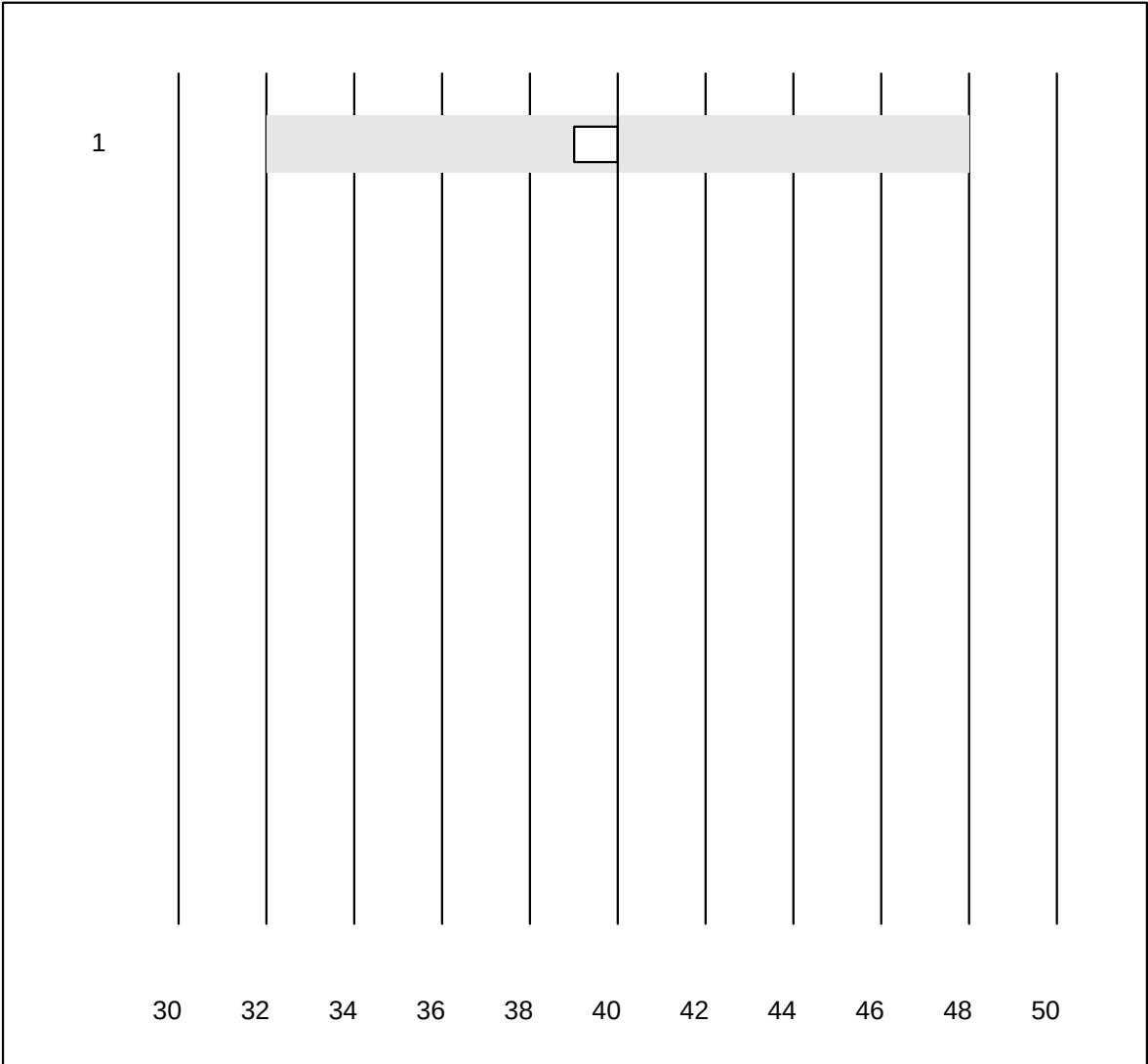

Tolleranza MQ : 20 % LDH CSF (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Roche	4	100.0	0.0	0.0	40	1.3	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Albumina CSF



Tolleranza MQ : 20 % Albumina CSF (mg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	282.00	3.3	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								


CDT

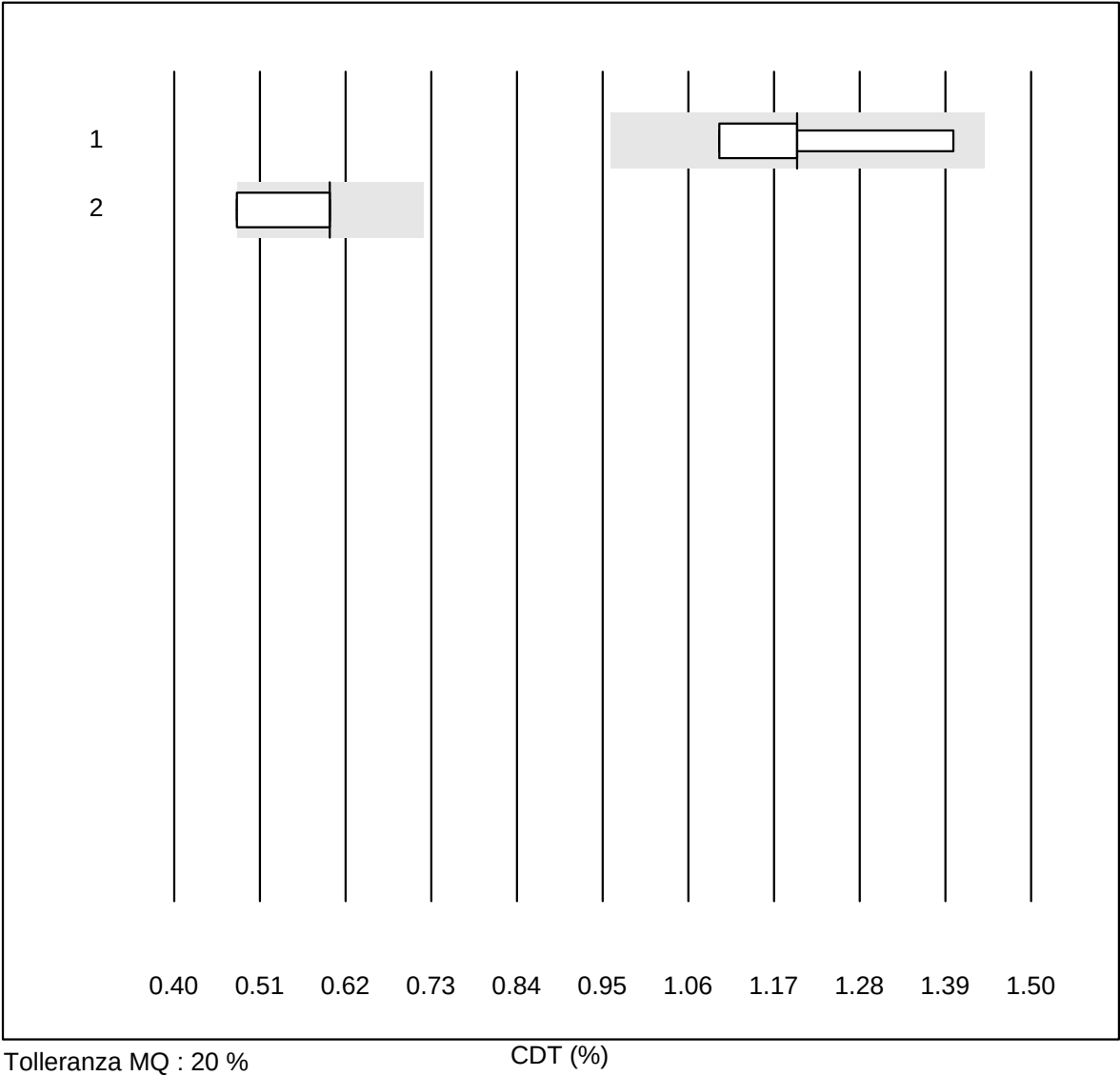

Tolleranza MQ : 20 %


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Immunoassay	4	100.0	0.0	0.0	1.20	10.3	e*
2	altri metodi	5	60.0	20.0	20.0	0.60	11.7	e*

Ciclosporina

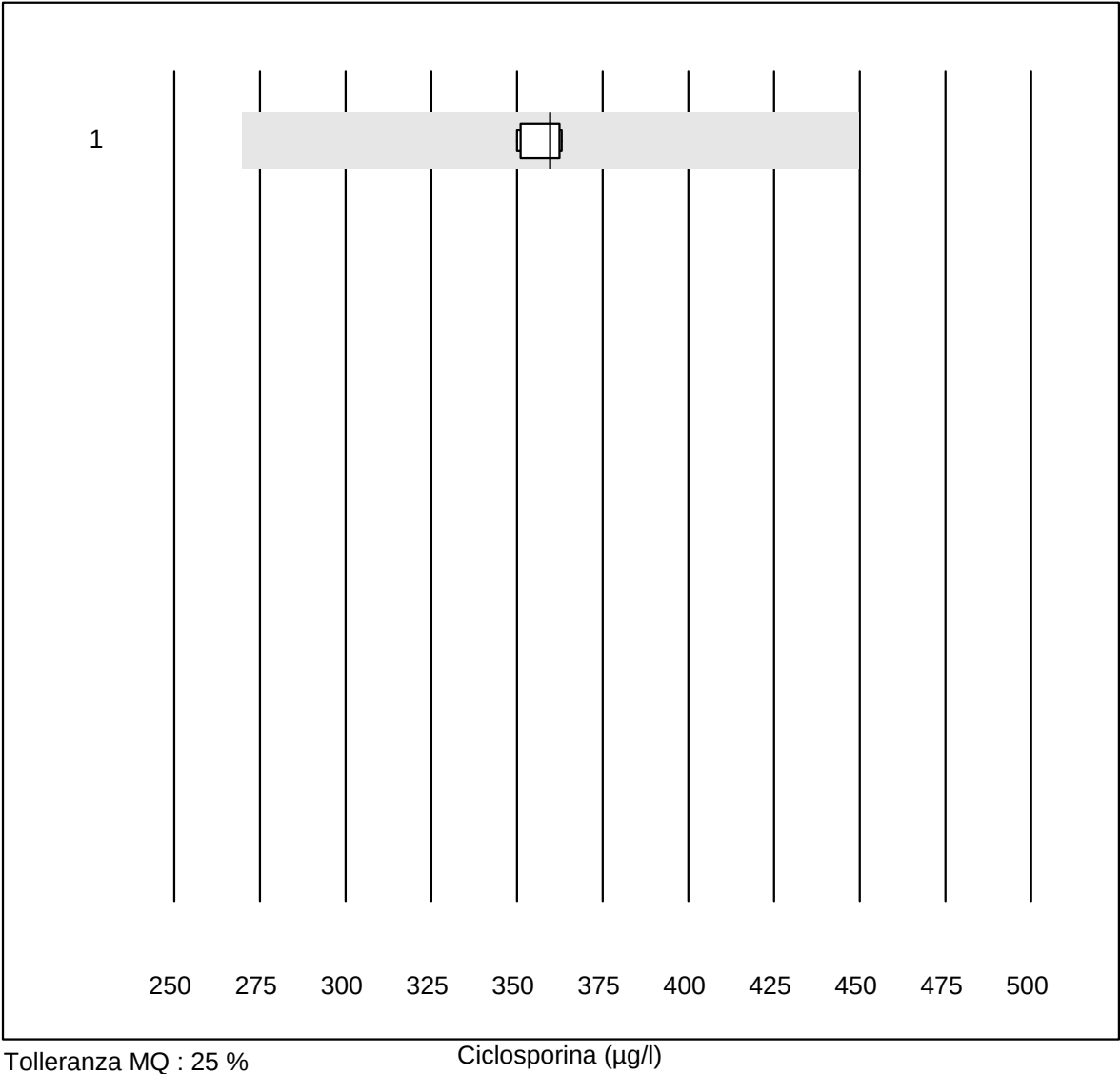

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	359.6	1.8	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Sirolimus

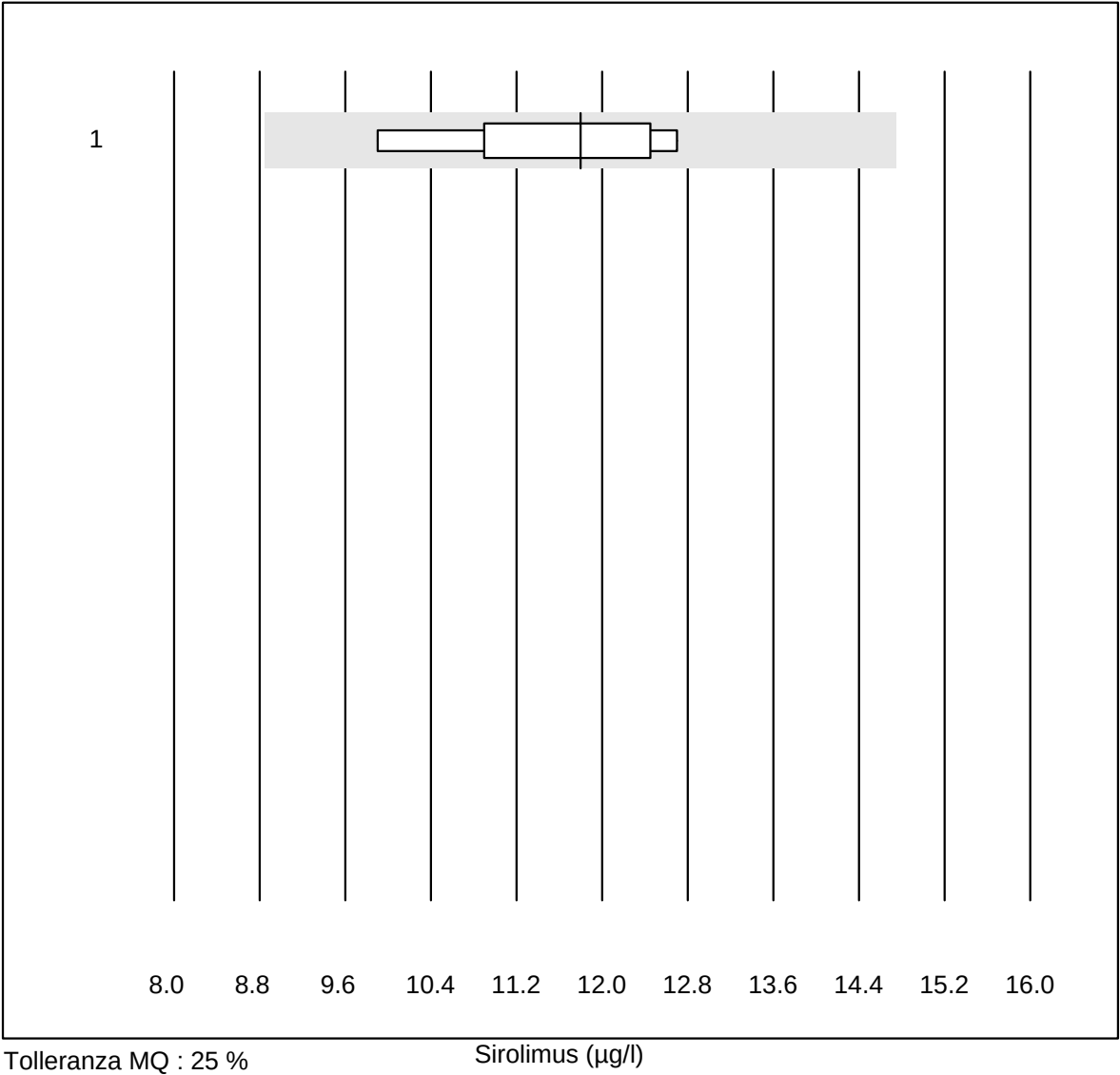


Tolleranza MQ : 25 %

Sirolimus (µg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	11.8	10.0	e*

Tacrolimus

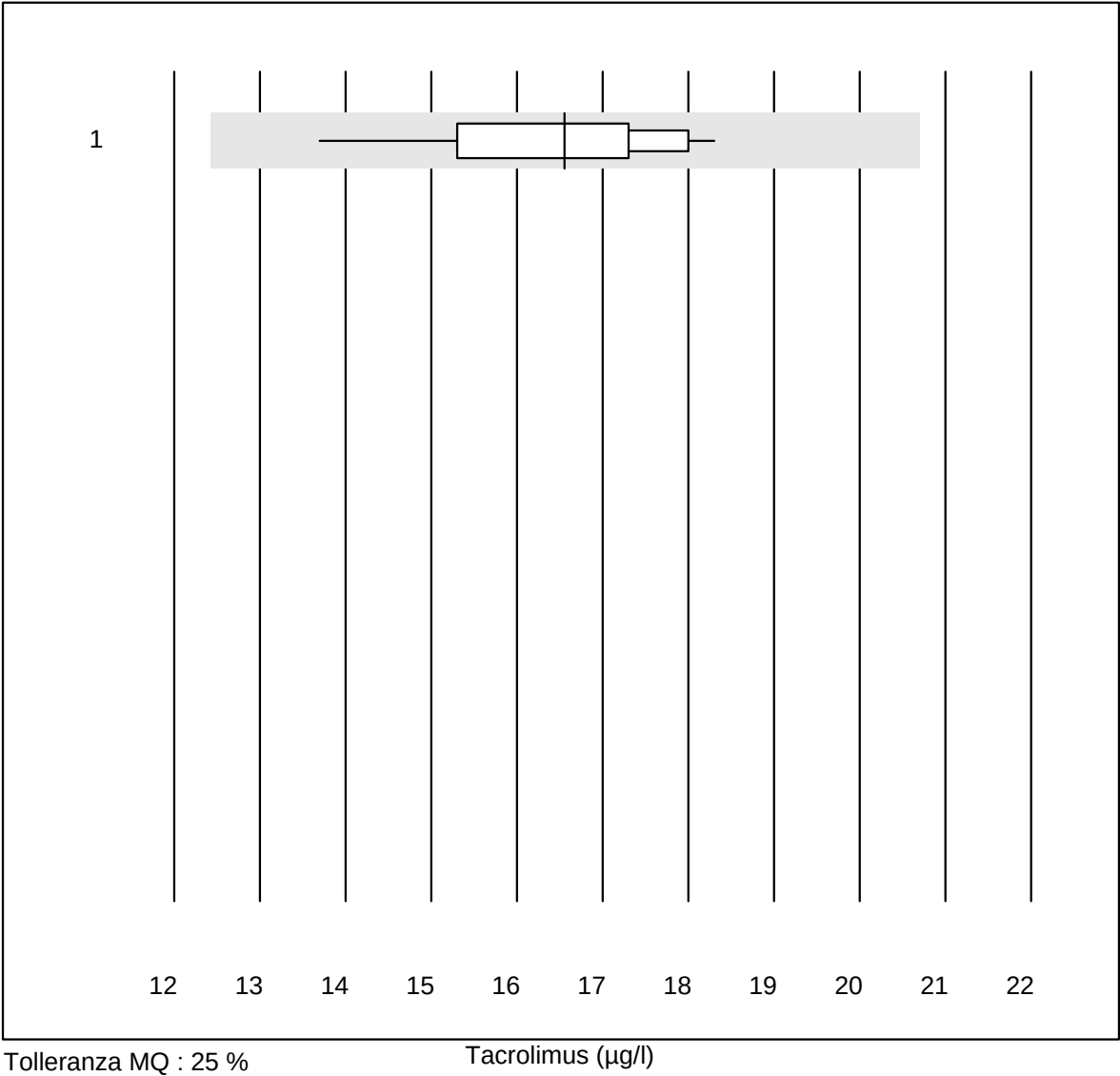


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	12	100.0	0.0	0.0	16.6	7.9	e

Everolimus

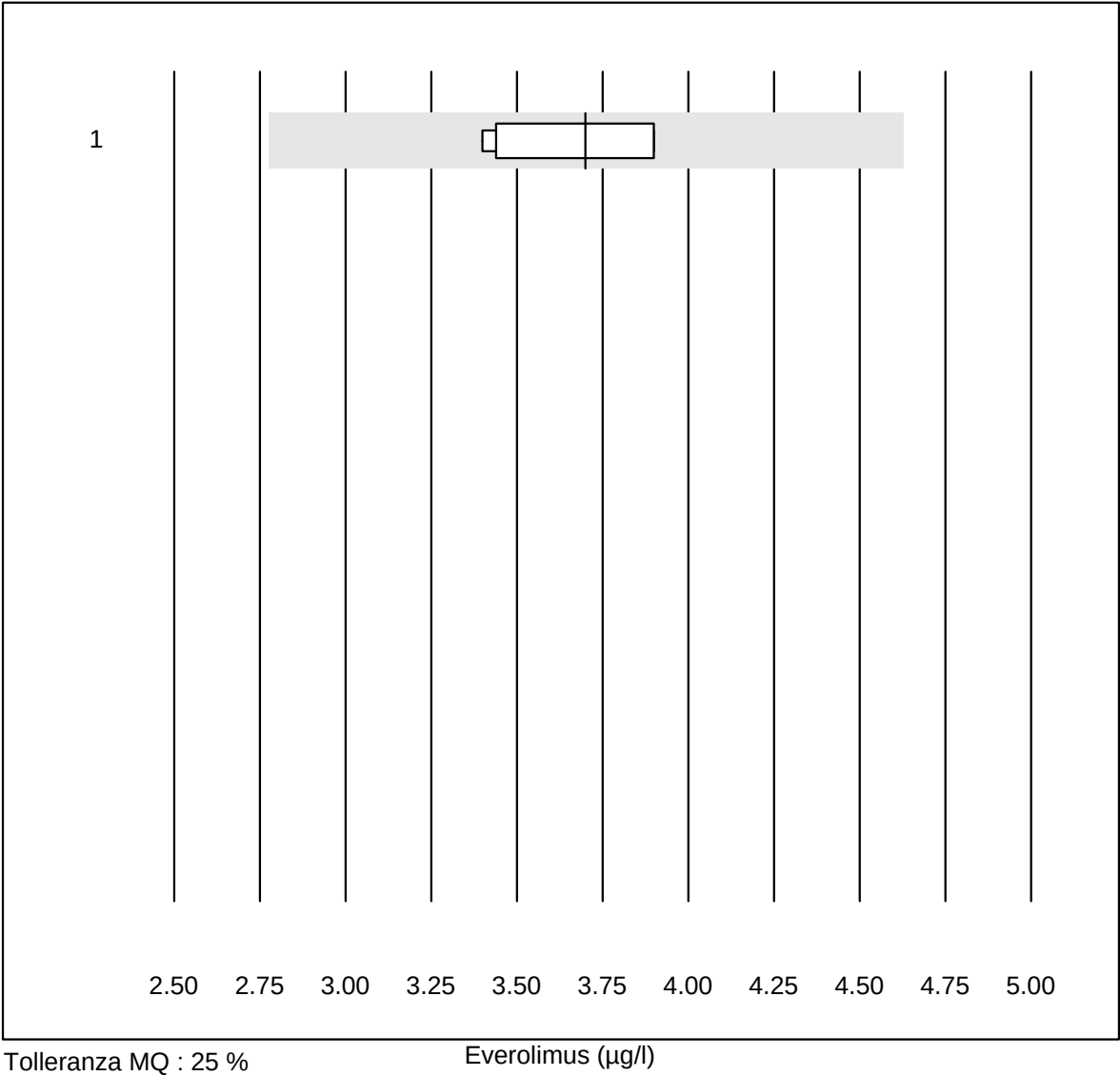

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	3.7	6.6	e


Totalproteina E

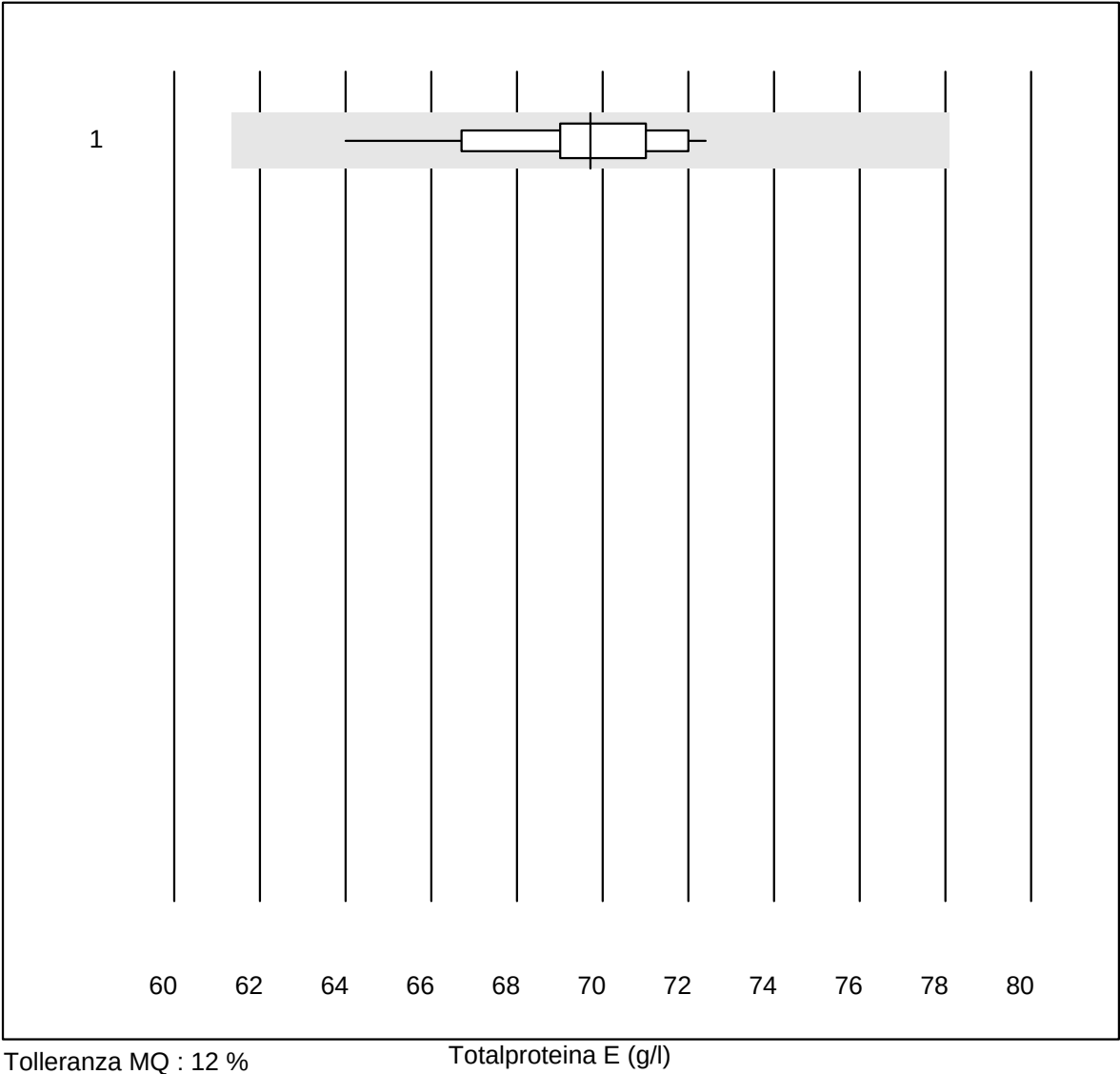

Tolleranza MQ : 12 %


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	18	100.0	0.0	0.0	69.7	3.0	e

albumina E

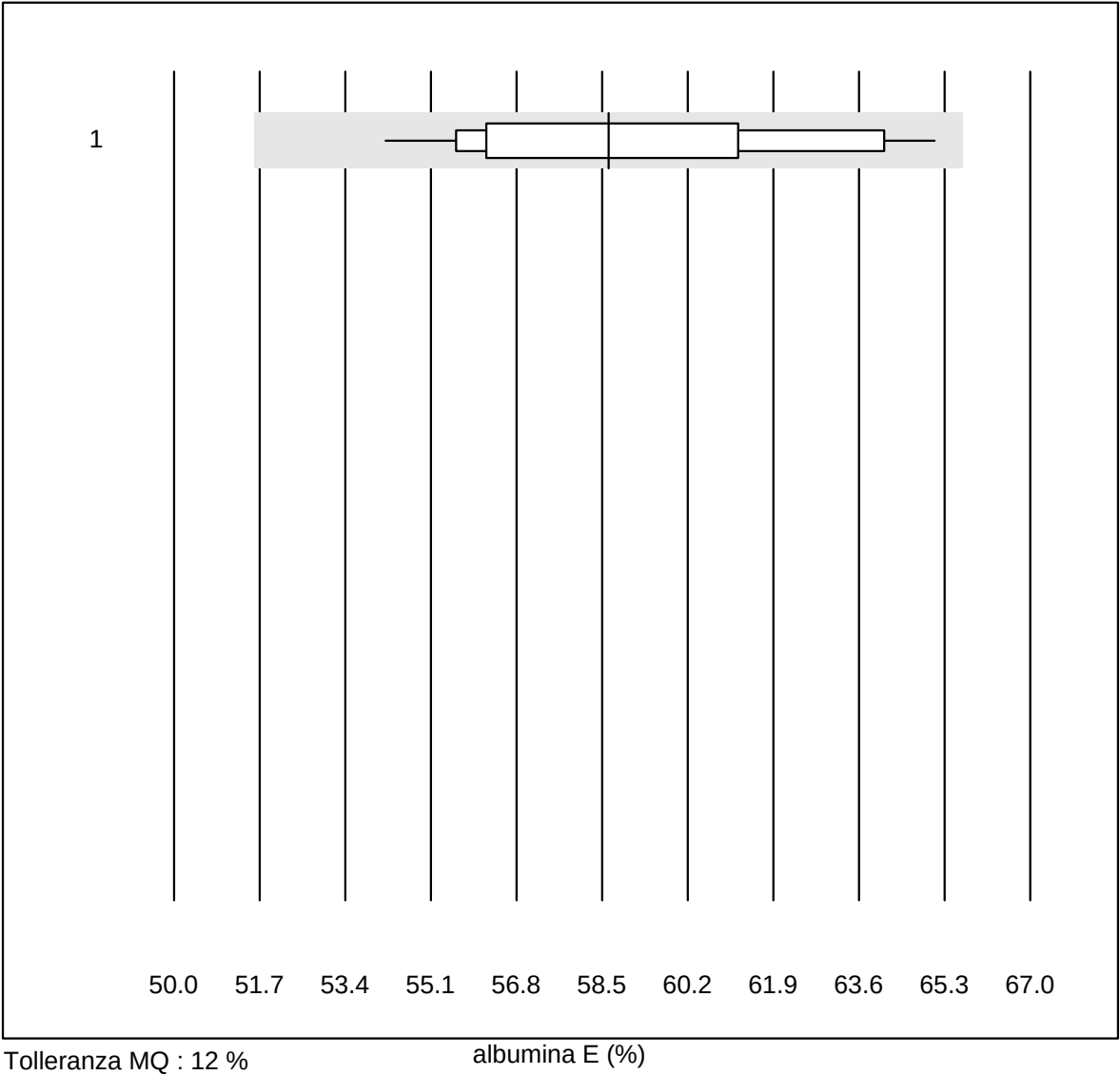

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Elettroforesi	32	100.0	0.0	0.0	58.6	5.6	e


alfa-1-globuline

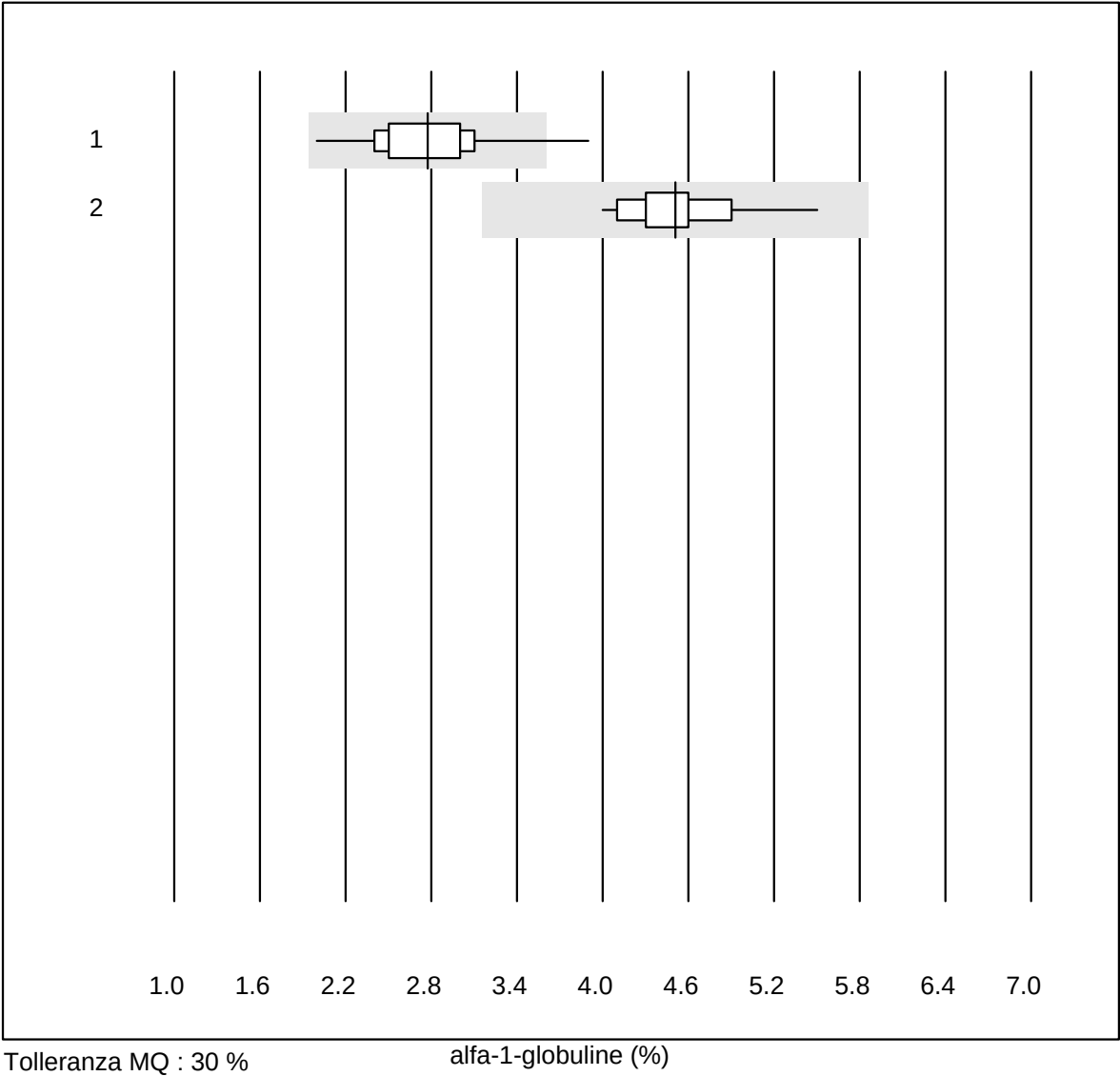

Tolleranza MQ : 30 %


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Elettroforesi	11	90.9	9.1	0.0	2.8	17.5	e*
2	Elettroforesi capill	20	100.0	0.0	0.0	4.5	7.2	e

alfa-2-globuline

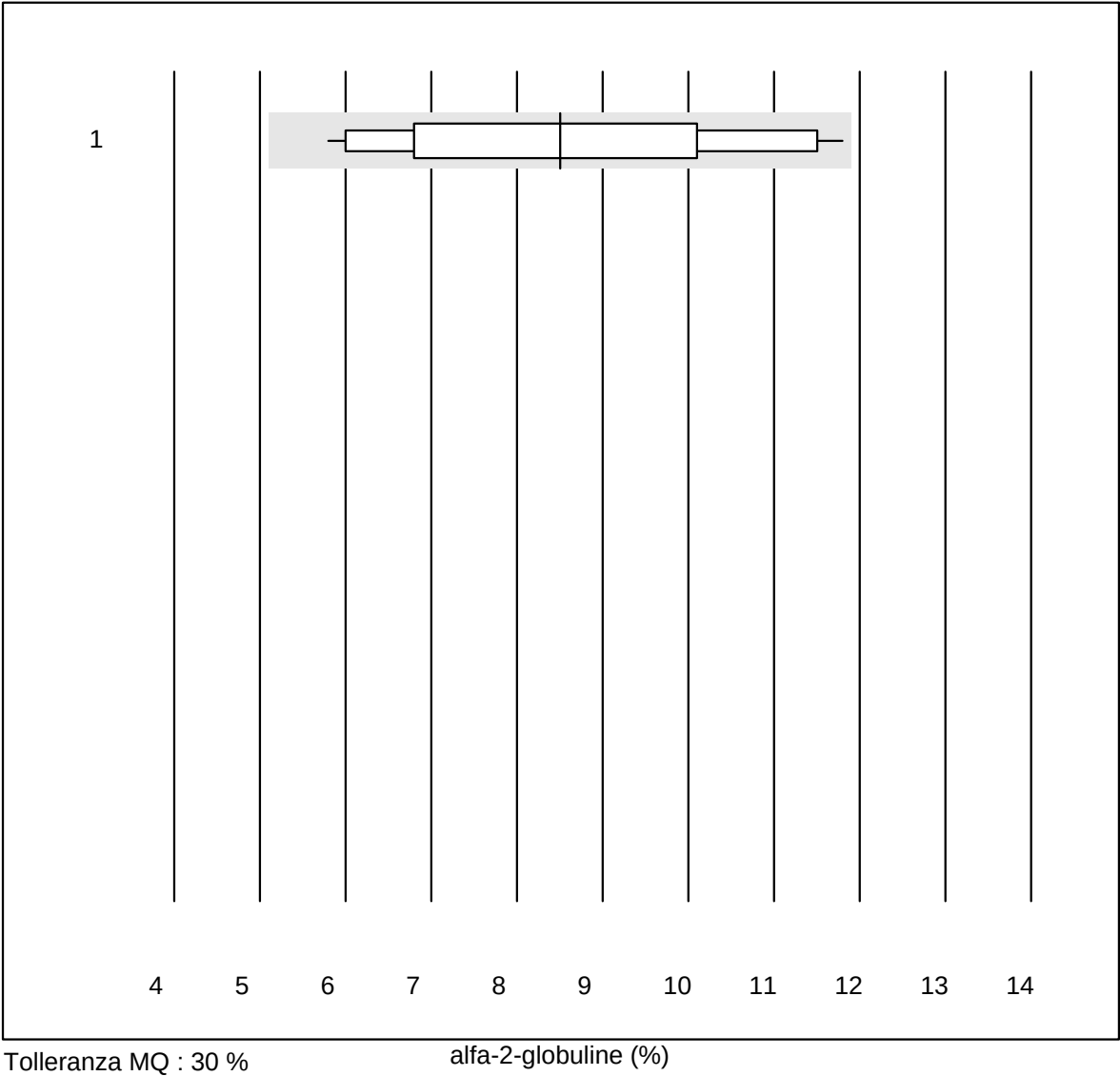


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Elettroforesi	31	96.8	0.0	3.2	8.5	22.9	a

Beta globulina 1

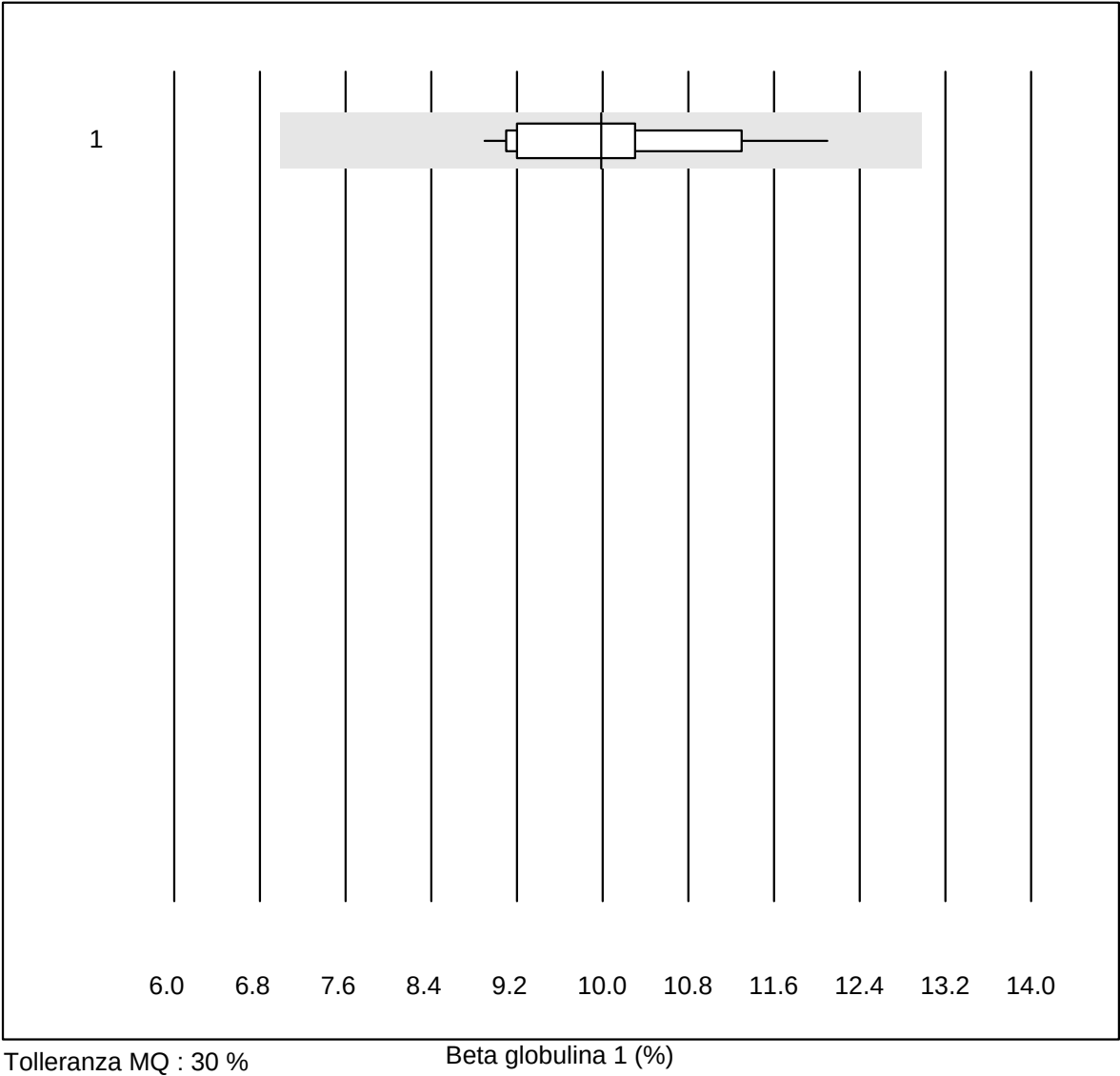


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Elettroforesi	12	100.0	0.0	0.0	10.0	10.4	e

Beta globulina 2

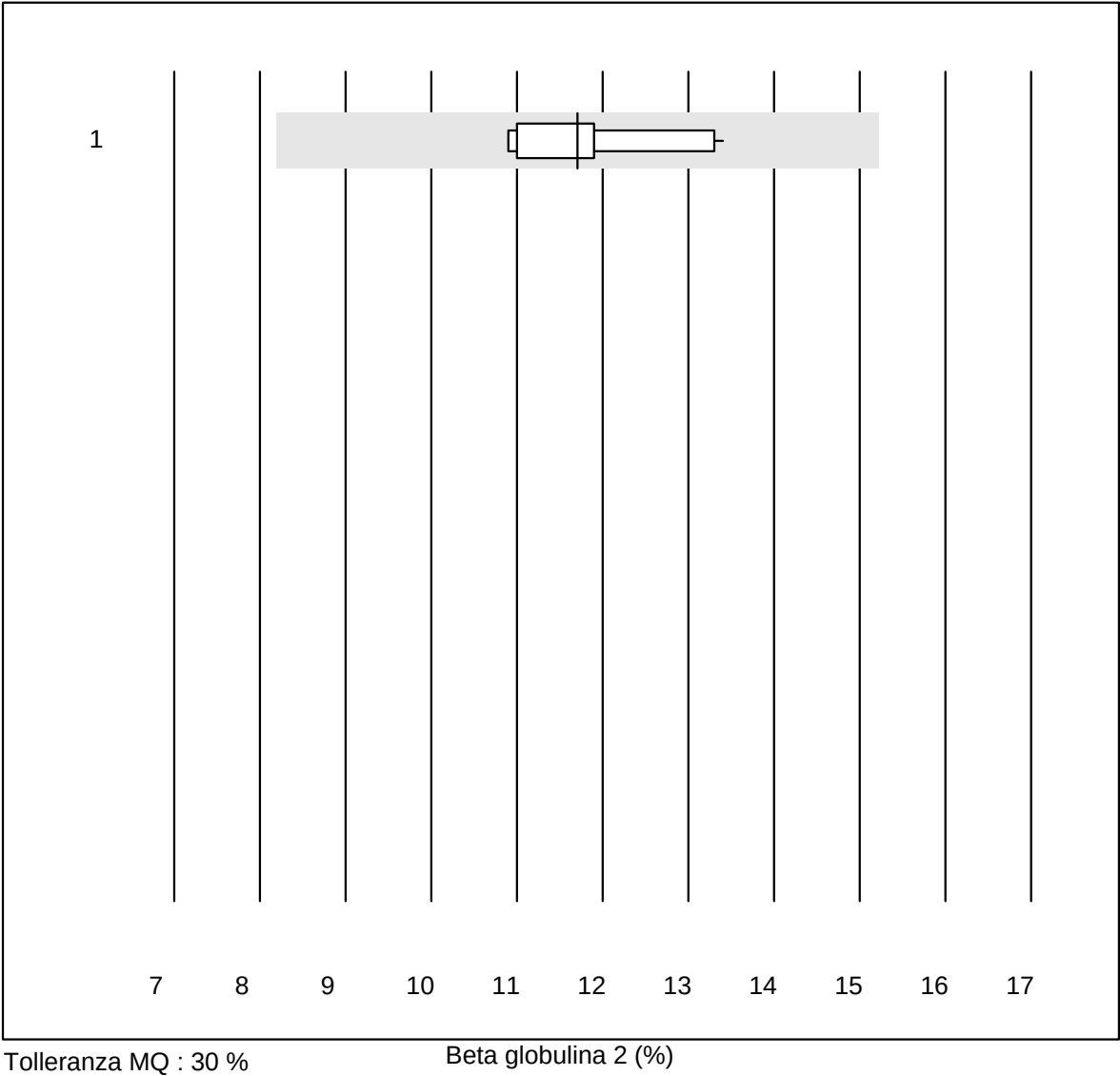


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Elettroforesi	11	100.0	0.0	0.0	11.7	7.5	e

gamma-Globuline

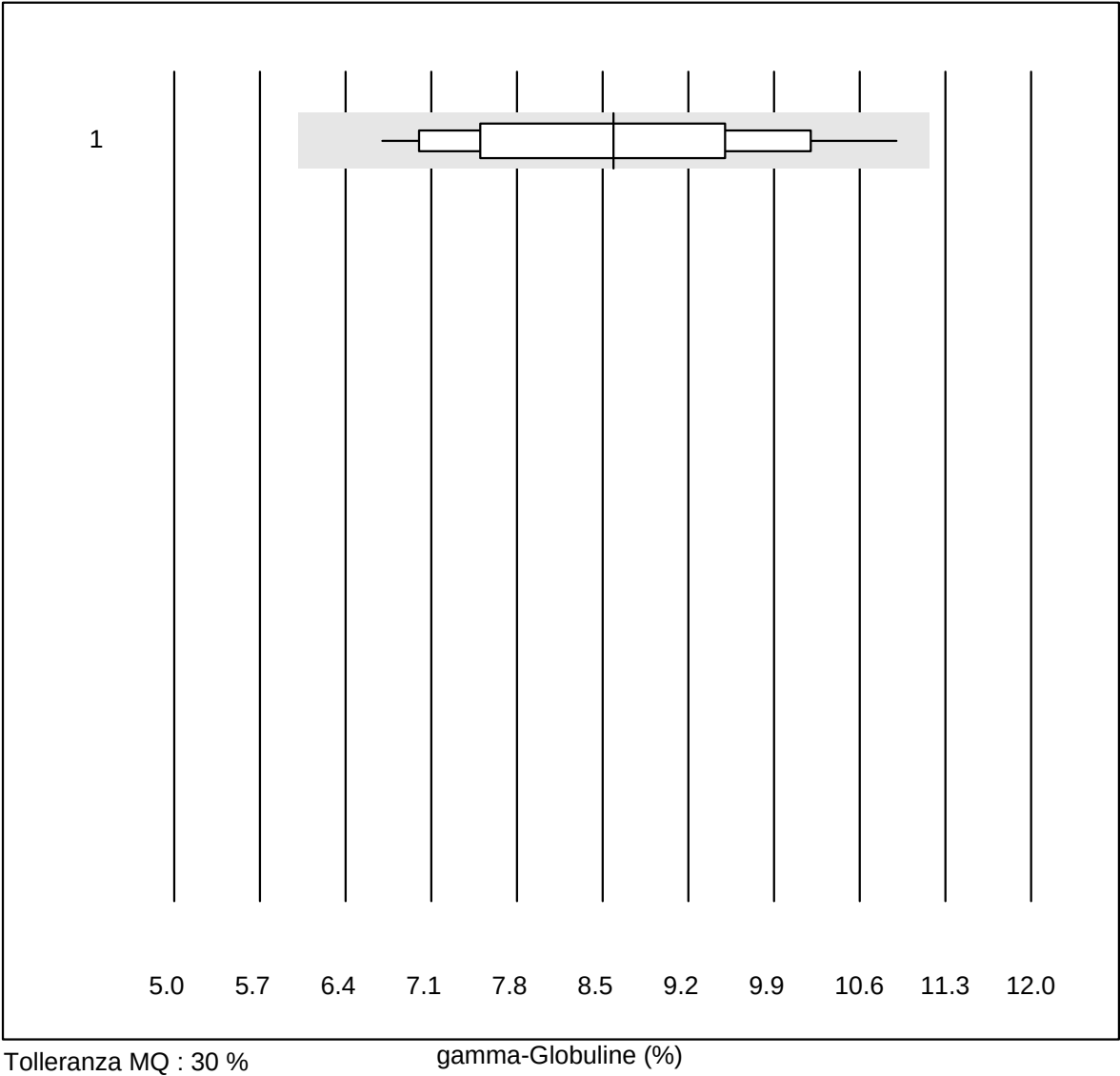


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Elettroforesi	28	96.4	0.0	3.6	8.6	14.0	e

Beta-Globulina+P

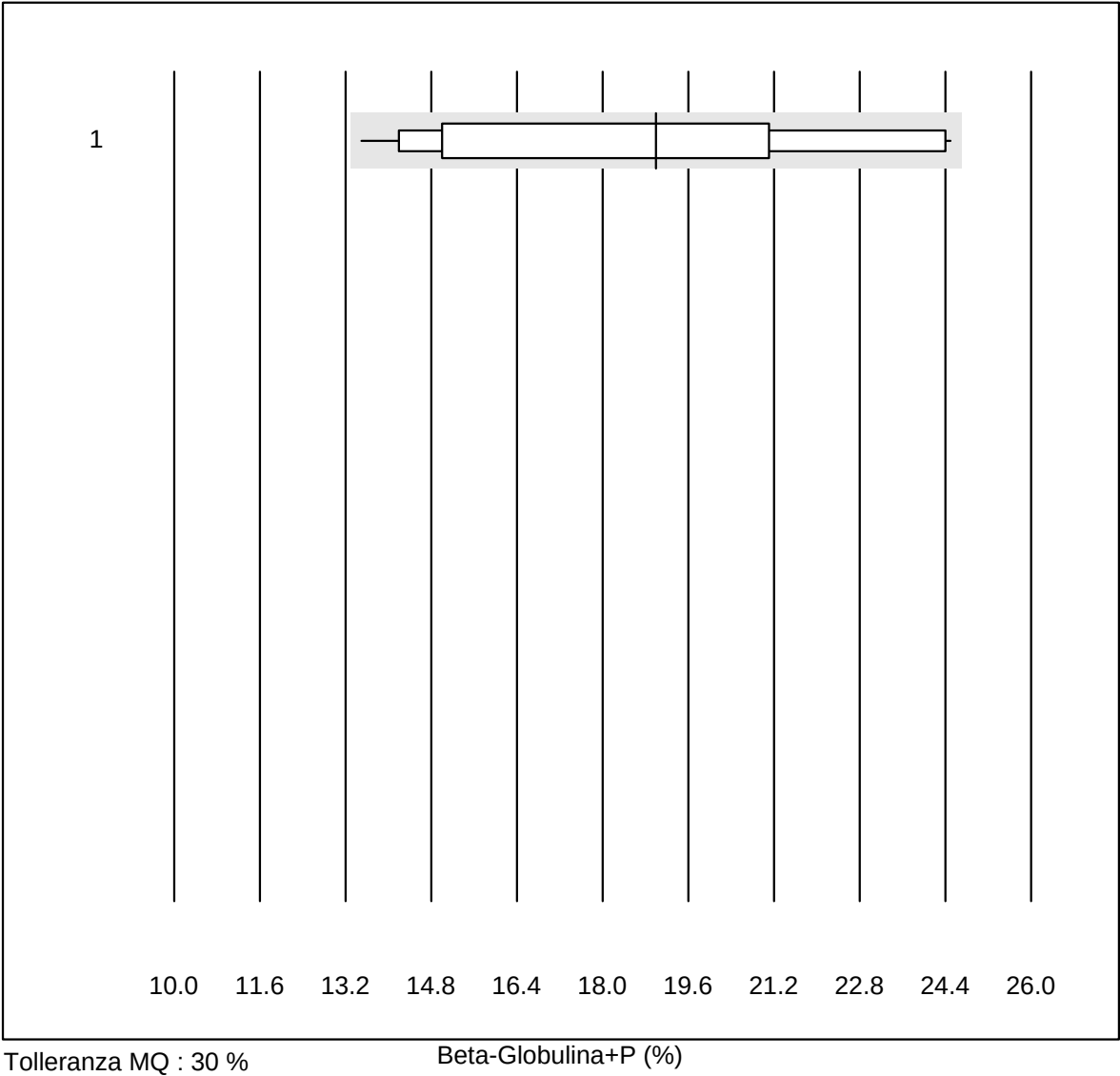

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Elettroforesi	17	100.0	0.0	0.0	19.0	20.1	a

Immunofissazione

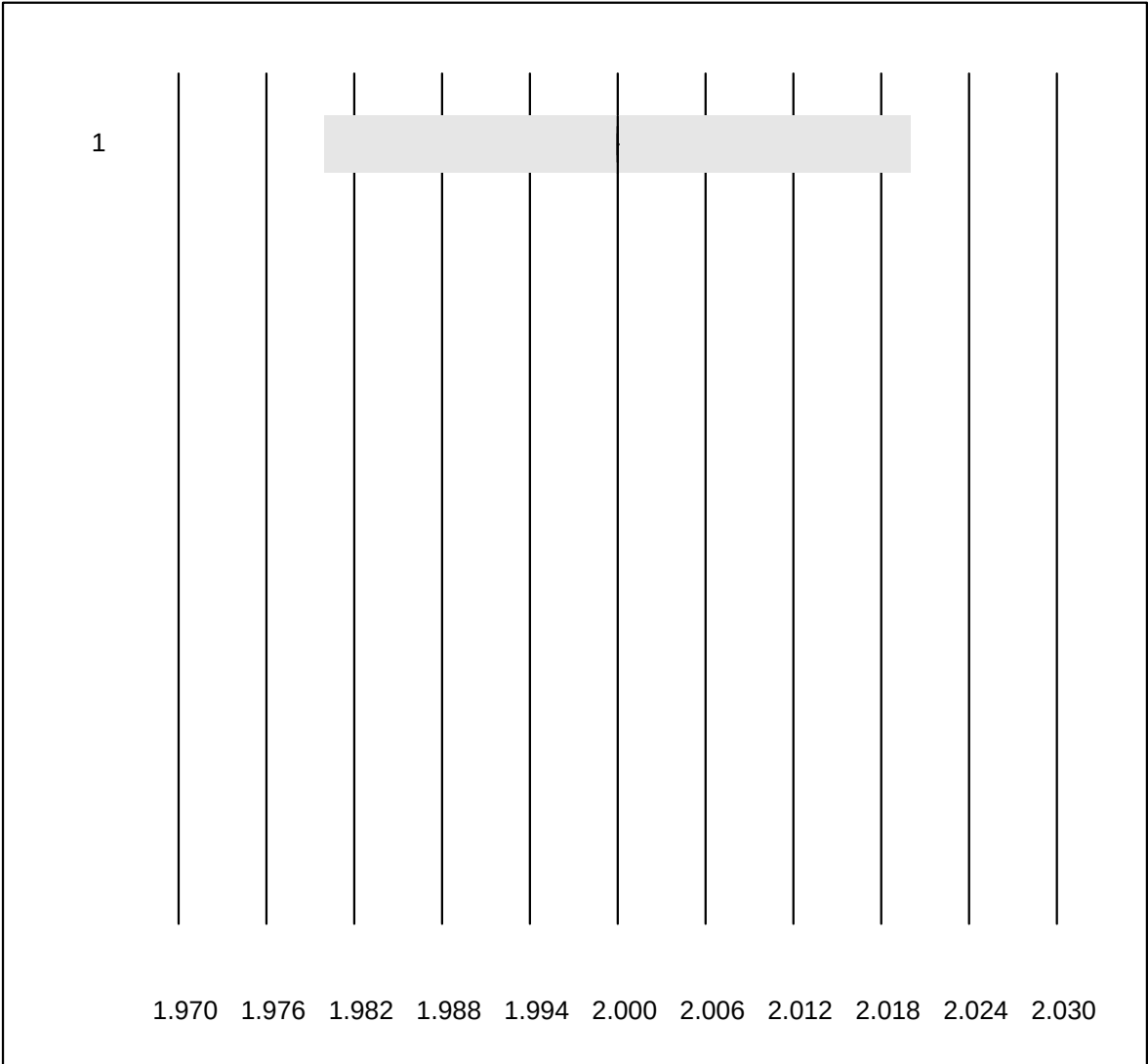


QUALAB Tolleranza : 1 %

Immunofissazione (Code)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Interpretation	28	96.4	0.0	3.6	2	0.0	e

Folati eritrocitari

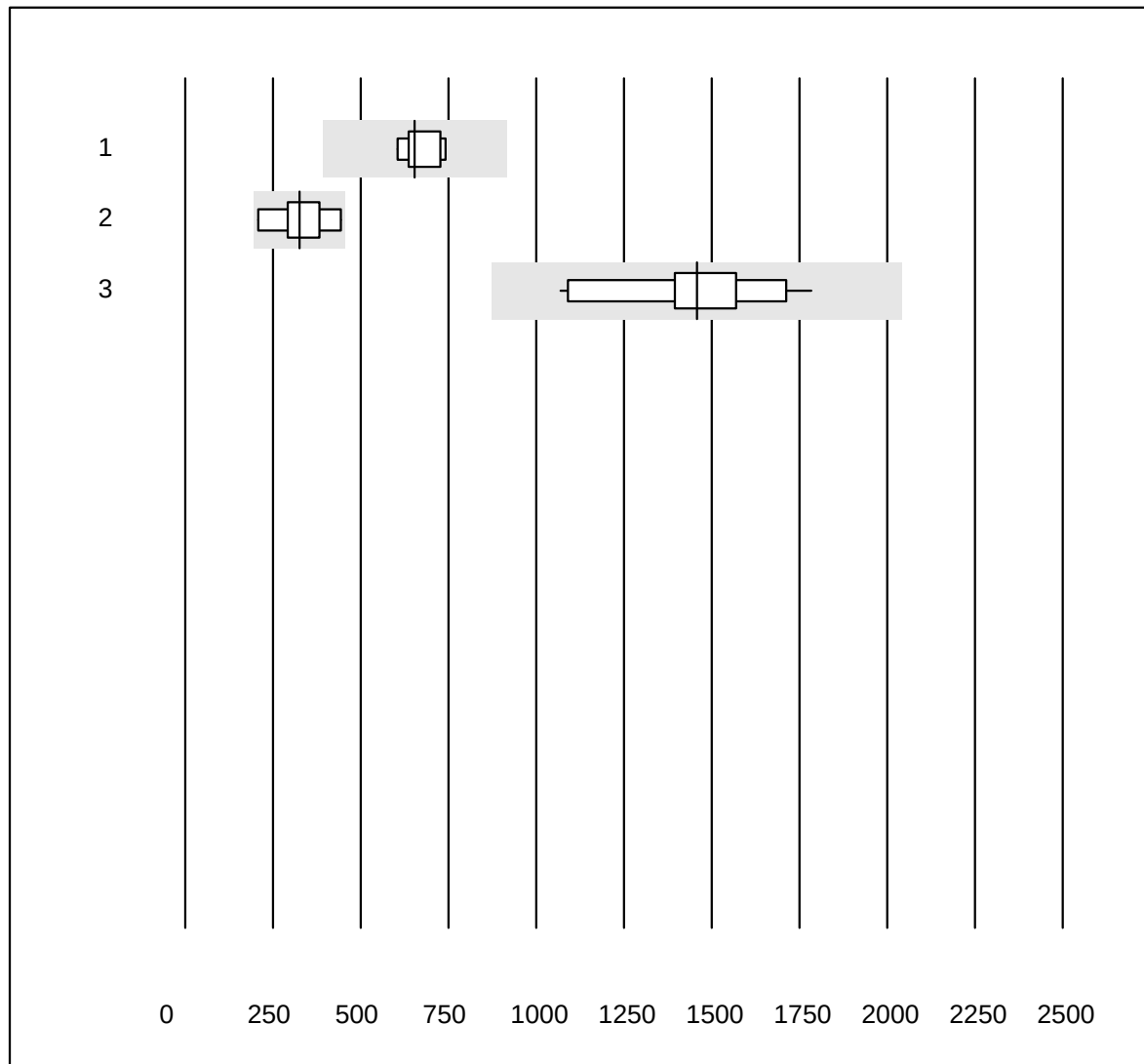


Tolleranza MQ : 40 %

Folati eritrocitari (nmol/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	654	8.8	e
2 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	326	23.8	a
3 Roche	26	100.0	0.0	0.0	1458	14.0	e

Acidi biliari

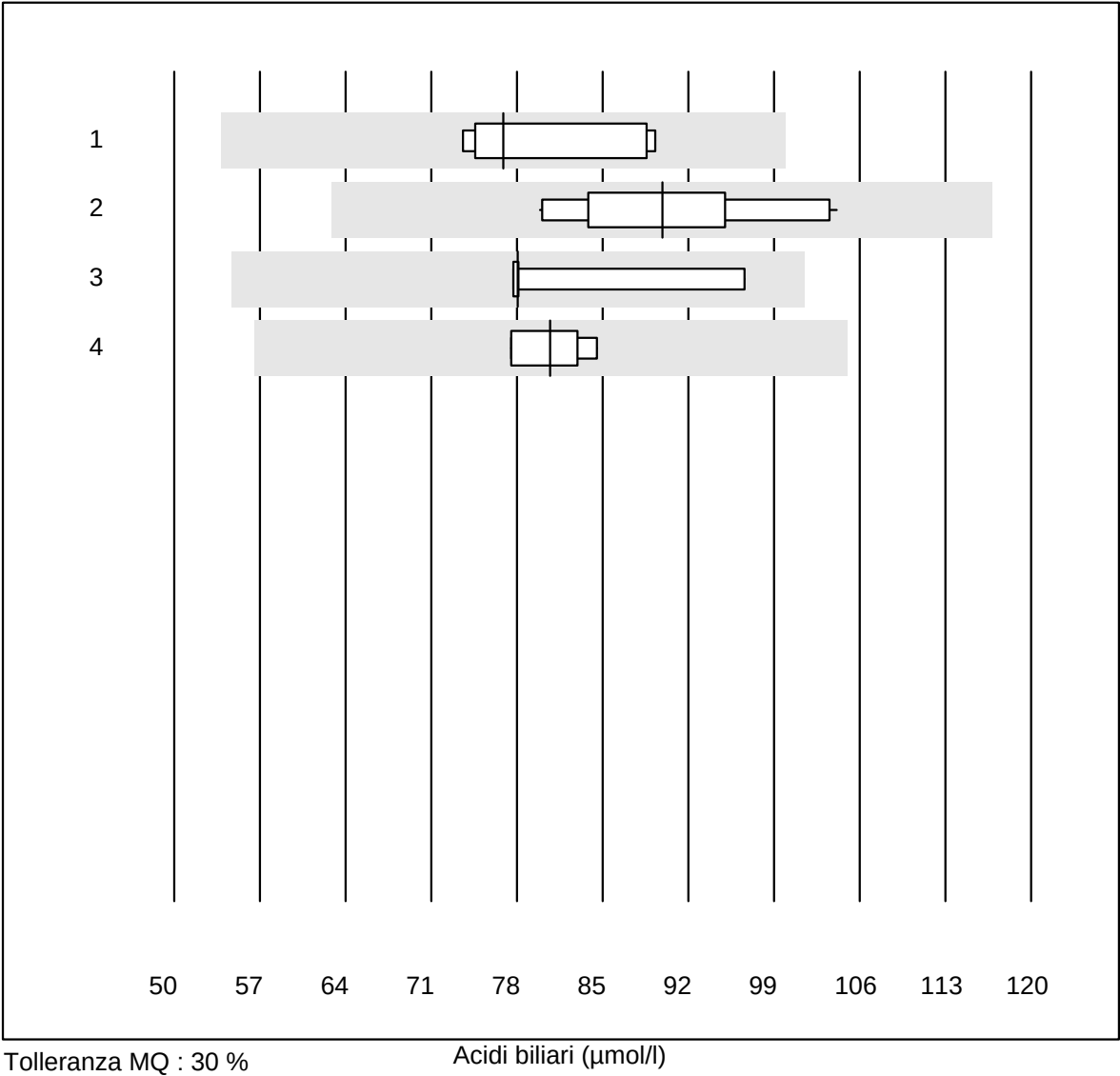

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	76.9	9.6	e*
2	Roche	14	100.0	0.0	0.0	89.9	9.0	e
3	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	78.1	11.3	e*
4	Siemens	4	100.0	0.0	0.0	80.7	4.2	e


BNP

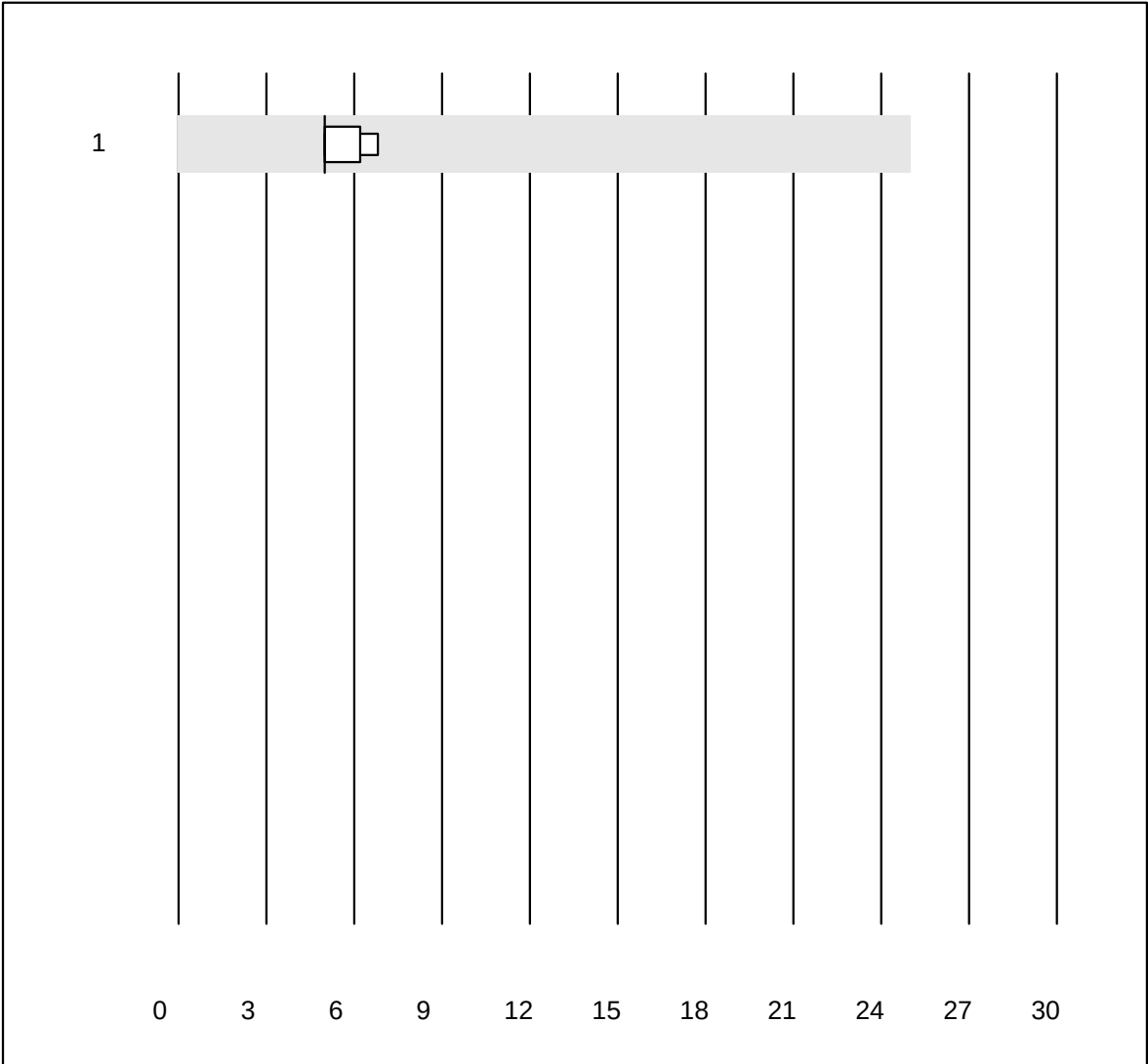

QUALAB Tolleranza : 27 %
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Triage	6	100.0	0.0	0.0	5.0	14.5	e*

Troponina I Triage

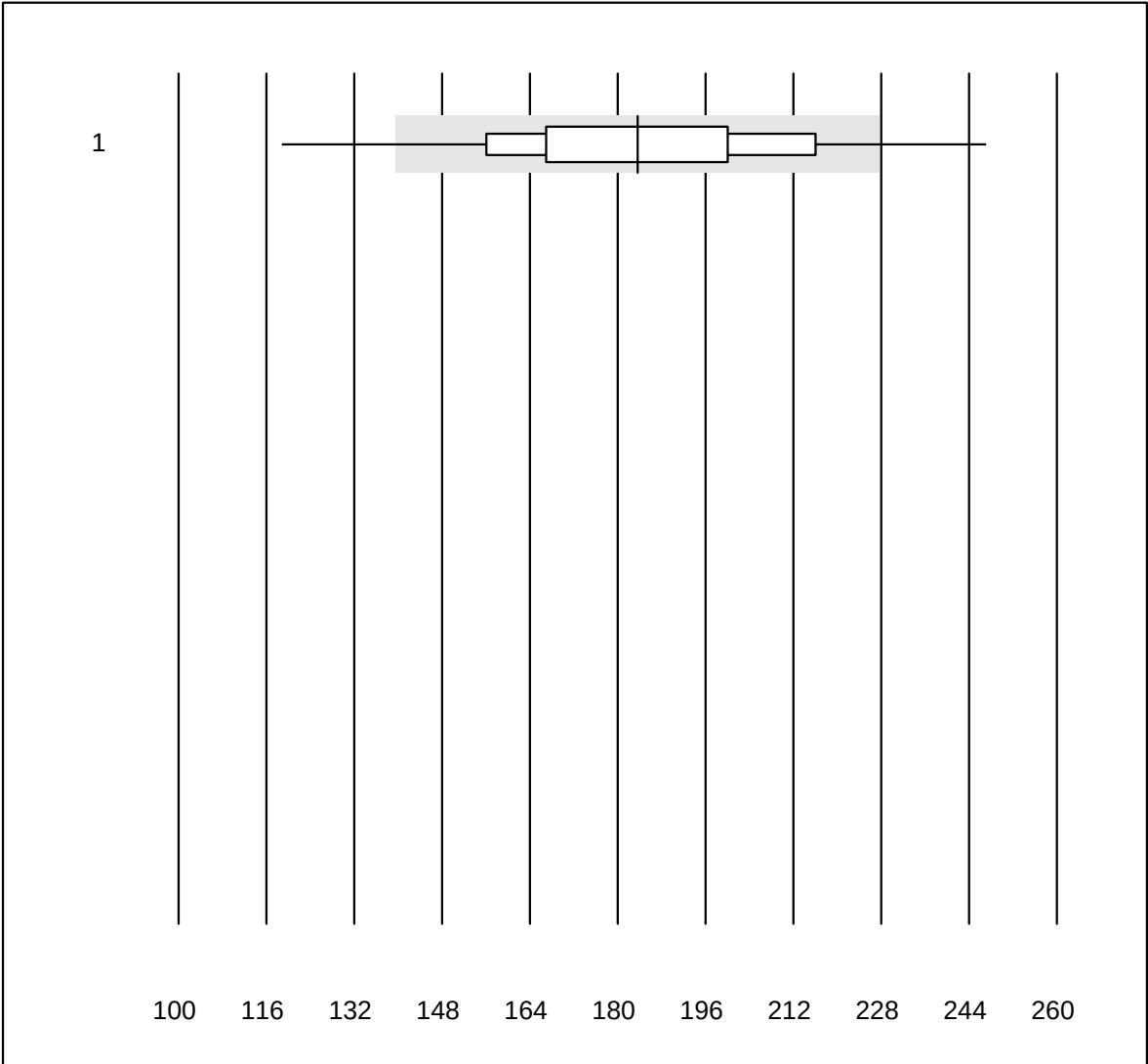


QUALAB Tolleranza : 24 % Troponina I Triage (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage high sensitiv	533	91.7	6.2	2.1	183.65	13.0	e


Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)

NT-pro BNP

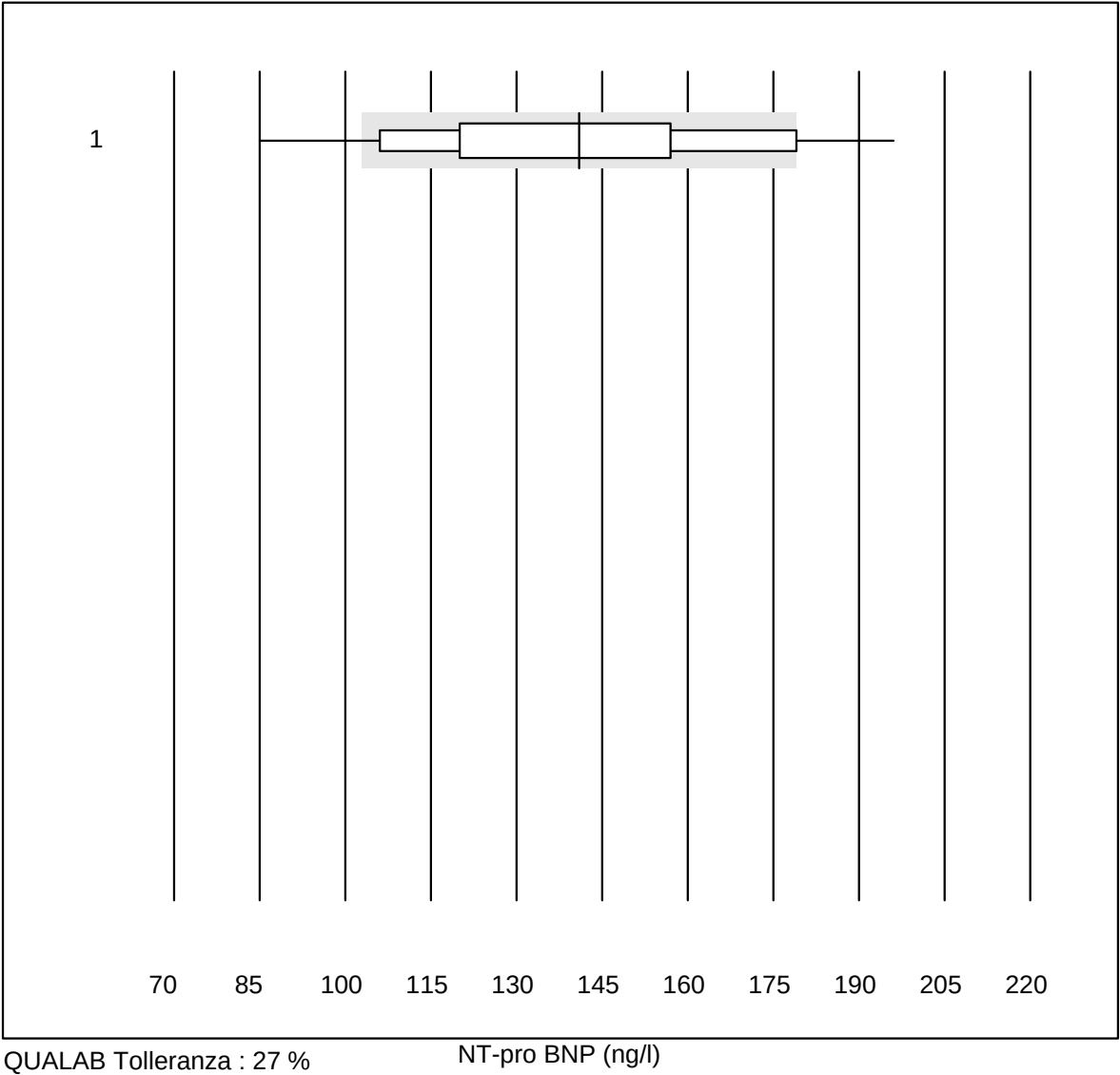

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Triage	289	79.6	12.8	7.6	141	18.3	e

Vitamina D 25 (OH)

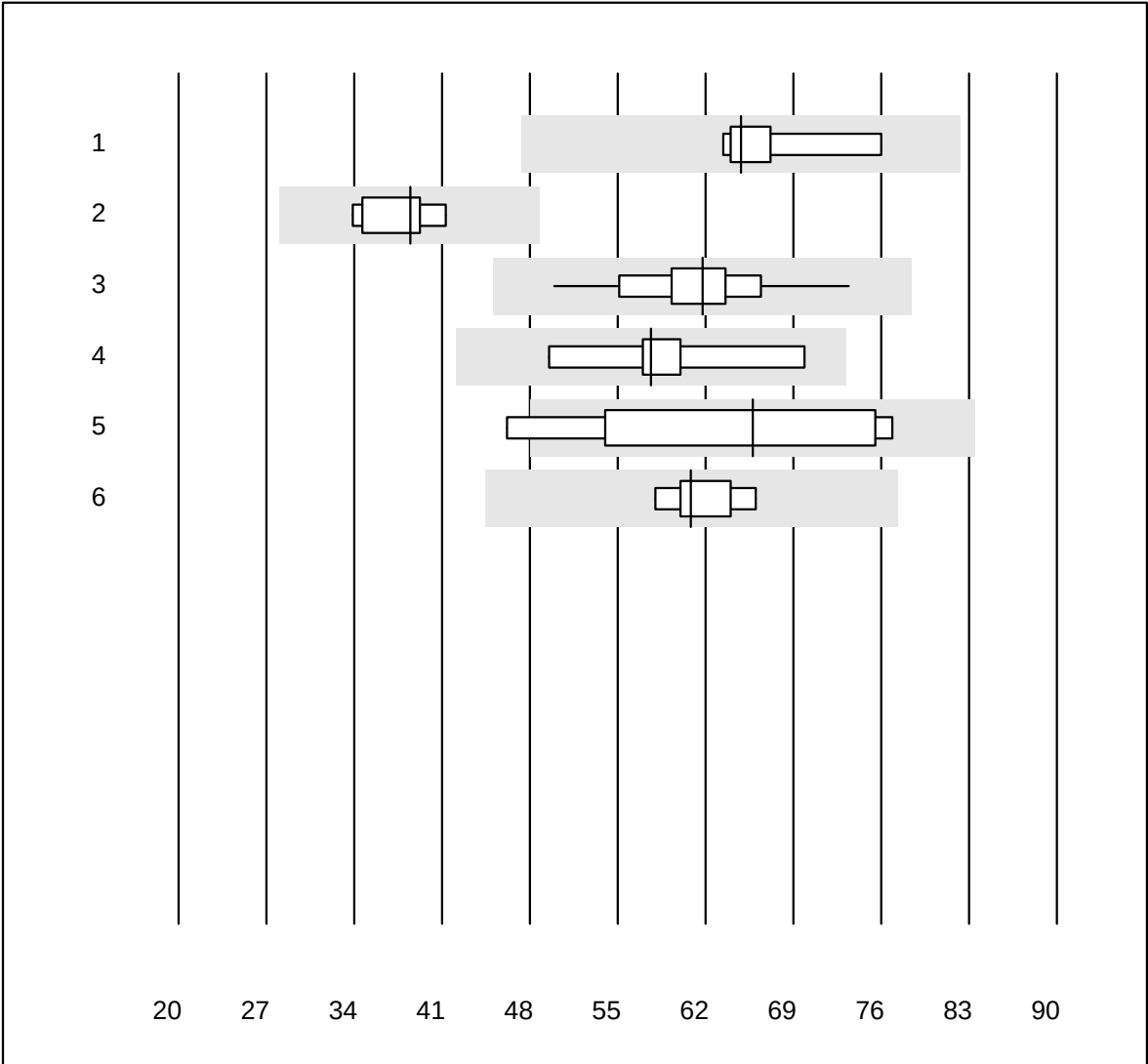


QUALAB Tolleranza : 27 %

Vitamina D 25 (OH) (nmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 LCMS	6	100.0	0.0	0.0	64.9	7.1	e
2 AFIAS	8	100.0	0.0	0.0	38.5	6.5	e
3 Cobas	23	100.0	0.0	0.0	61.8	8.3	e
4 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	57.7	12.5	e*
5 altri metodi	11	63.6	18.2	18.2	65.7	19.6	a
6 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	60.9	4.7	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Vitamina D 1,25-(OH)2

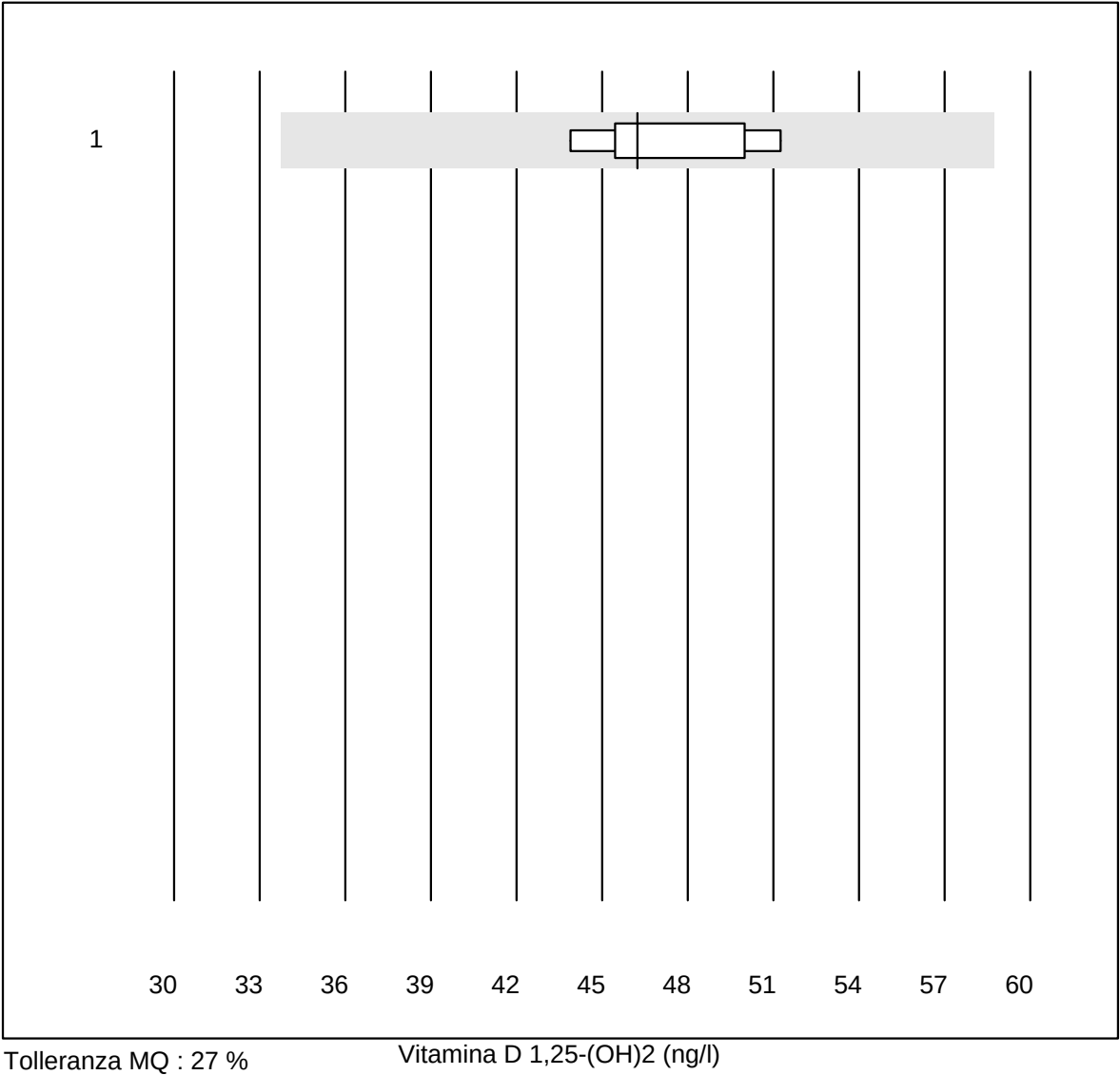

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	46.2	6.6	e

AMH




Tolleranza MQ : 25 %

AMH (pmol/l)


No.Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	154.5	12.4	e*
2	Roche	14	100.0	0.0	0.0	89.1	3.9	e
3	Beckman	5	100.0	0.0	0.0	99.4	8.4	e*

Inibina B

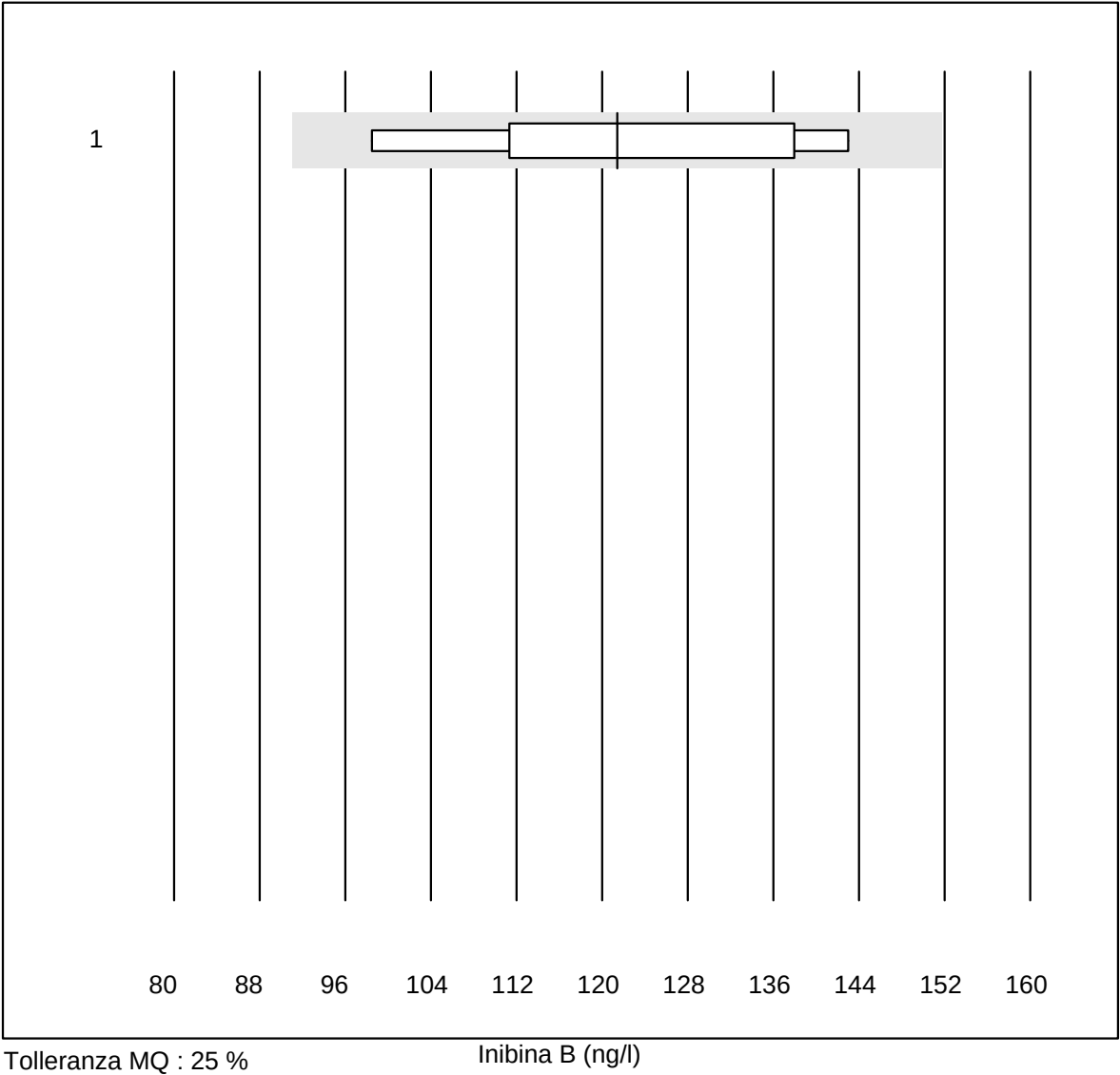

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	7	100.0	0.0	0.0	121.4	12.4	e*

Calcitonina

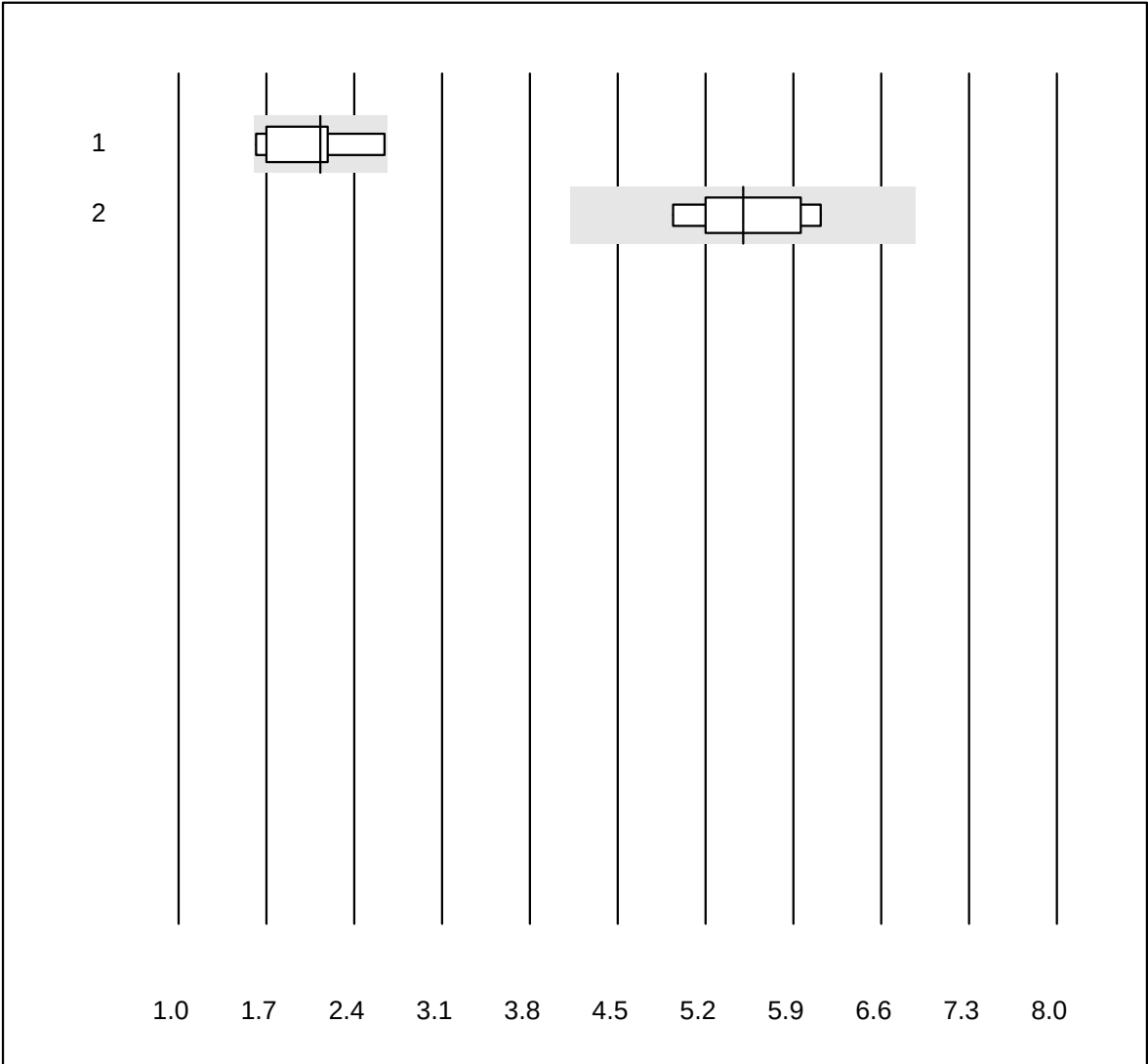


Tolleranza MQ : 25 %

Calcitonina (pmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Liaison	6	100.0	0.0	0.0	2.1	19.1	a
2	altri metodi	7	100.0	0.0	0.0	5.5	7.4	e

IGF-BP3

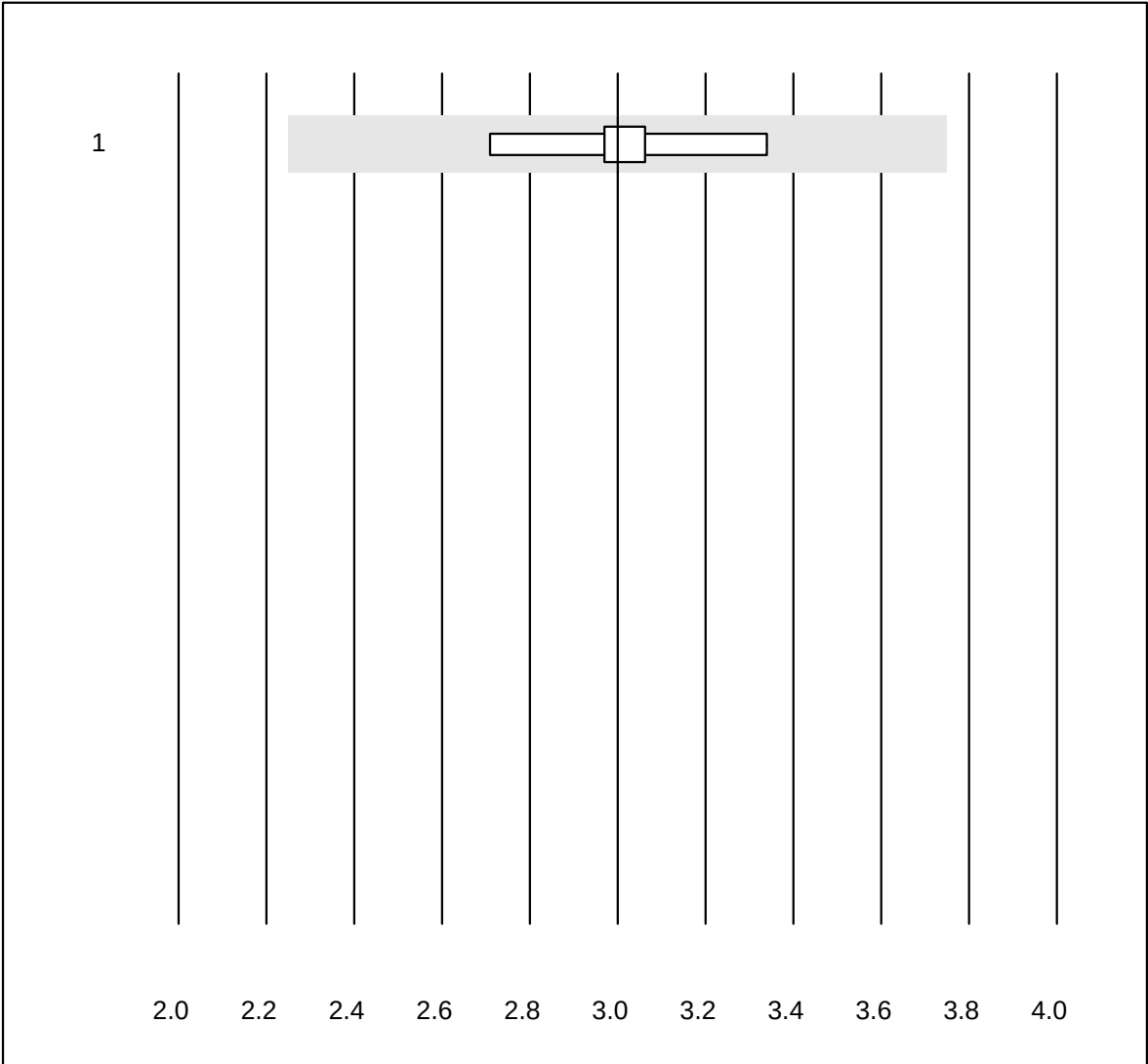

Tolleranza MQ : 25 % IGF-BP3 (mg/l)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Cobas	6	100.0	0.0	0.0	3.00	6.7	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Renina



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	9	100.0	0.0	0.0	117.5	5.7	d
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							


Aldosterone

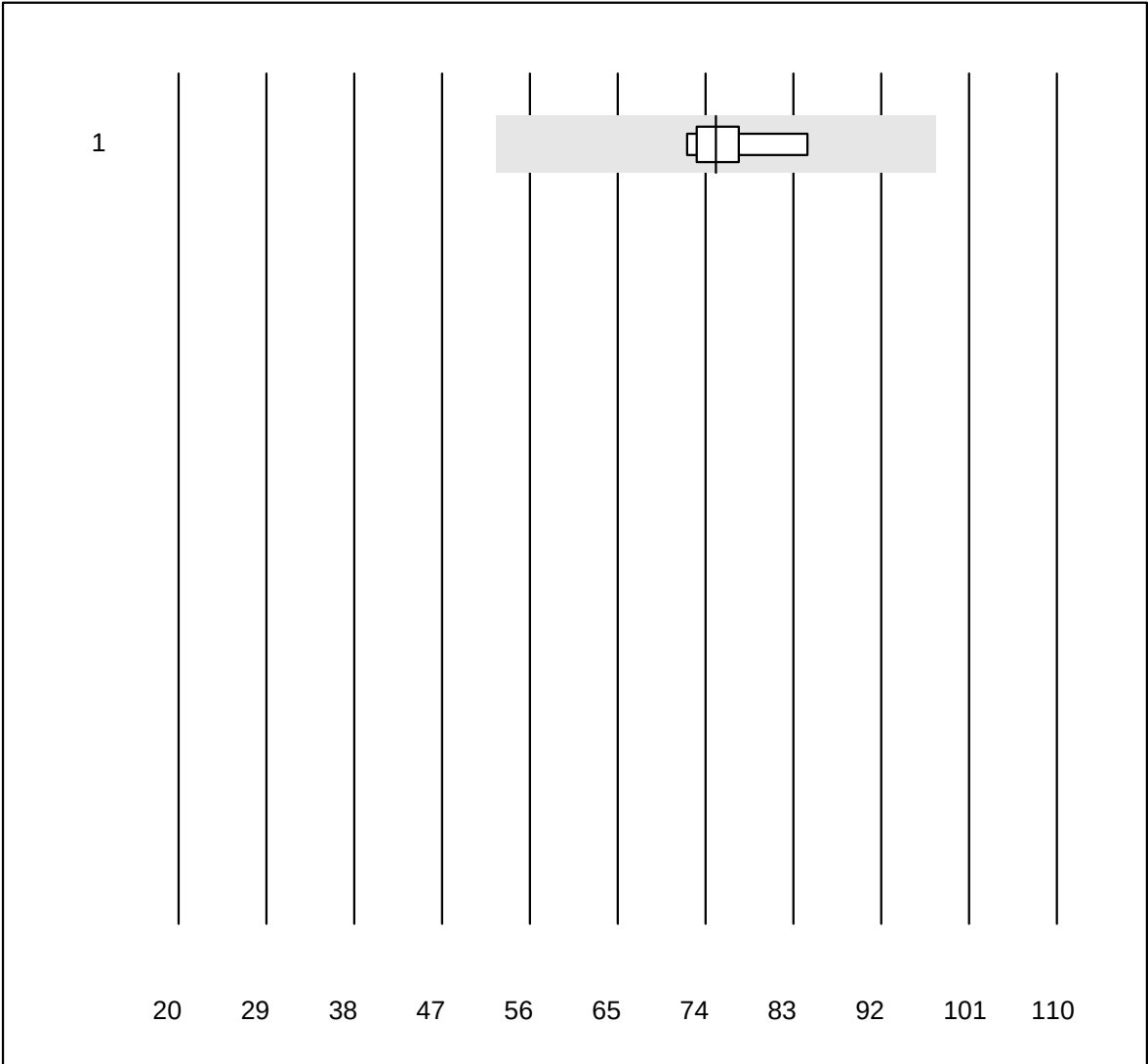

Tolleranza MQ : 30 % Aldosterone (ng/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	75.1	6.0	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

Anti Tireoglobulina

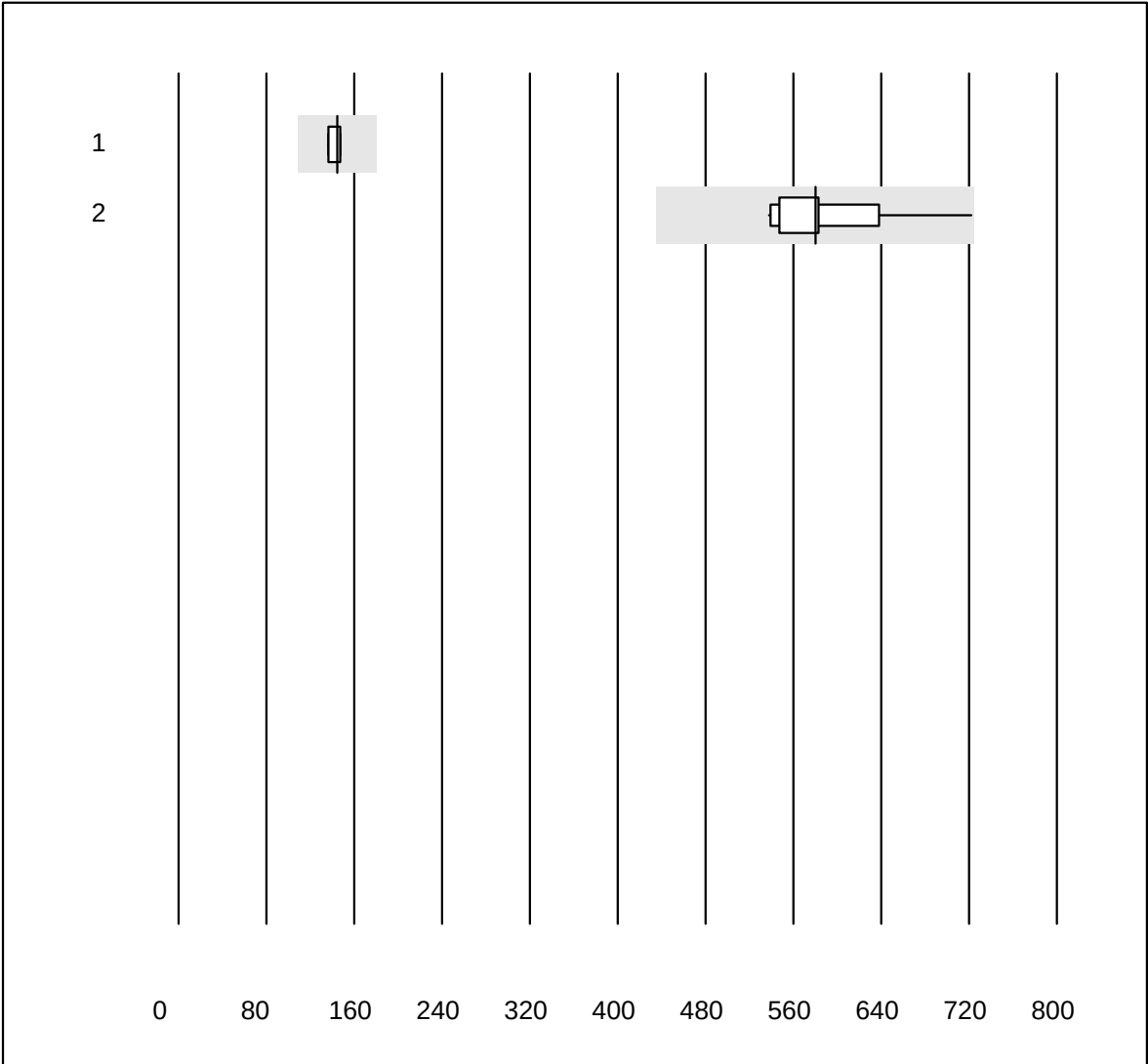


Tolleranza MQ : 25 %

Anti Tireoglobulina (IU/ml)

No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Alinity	4	75.0	0.0	25.0	144.2	3.9	e
2	Roche	16	100.0	0.0	0.0	580.0	8.1	a

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Anti TPO

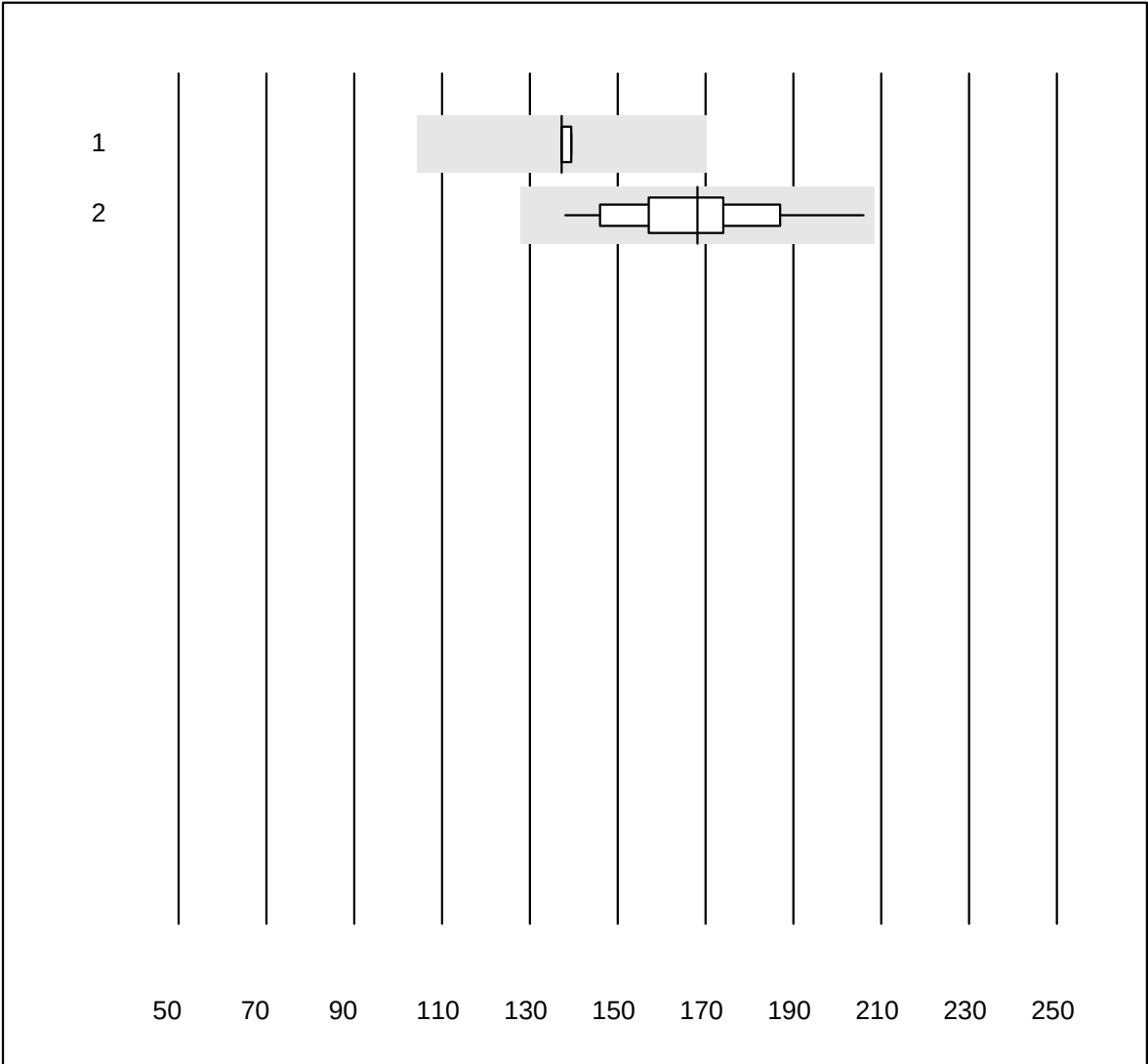


QUALAB Tolleranza : 24 %

Anti TPO (IU/ml)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Siemens	4	50.0	0.0	50.0	137	1.1	a
2	Roche	17	100.0	0.0	0.0	168	9.8	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

TRAK

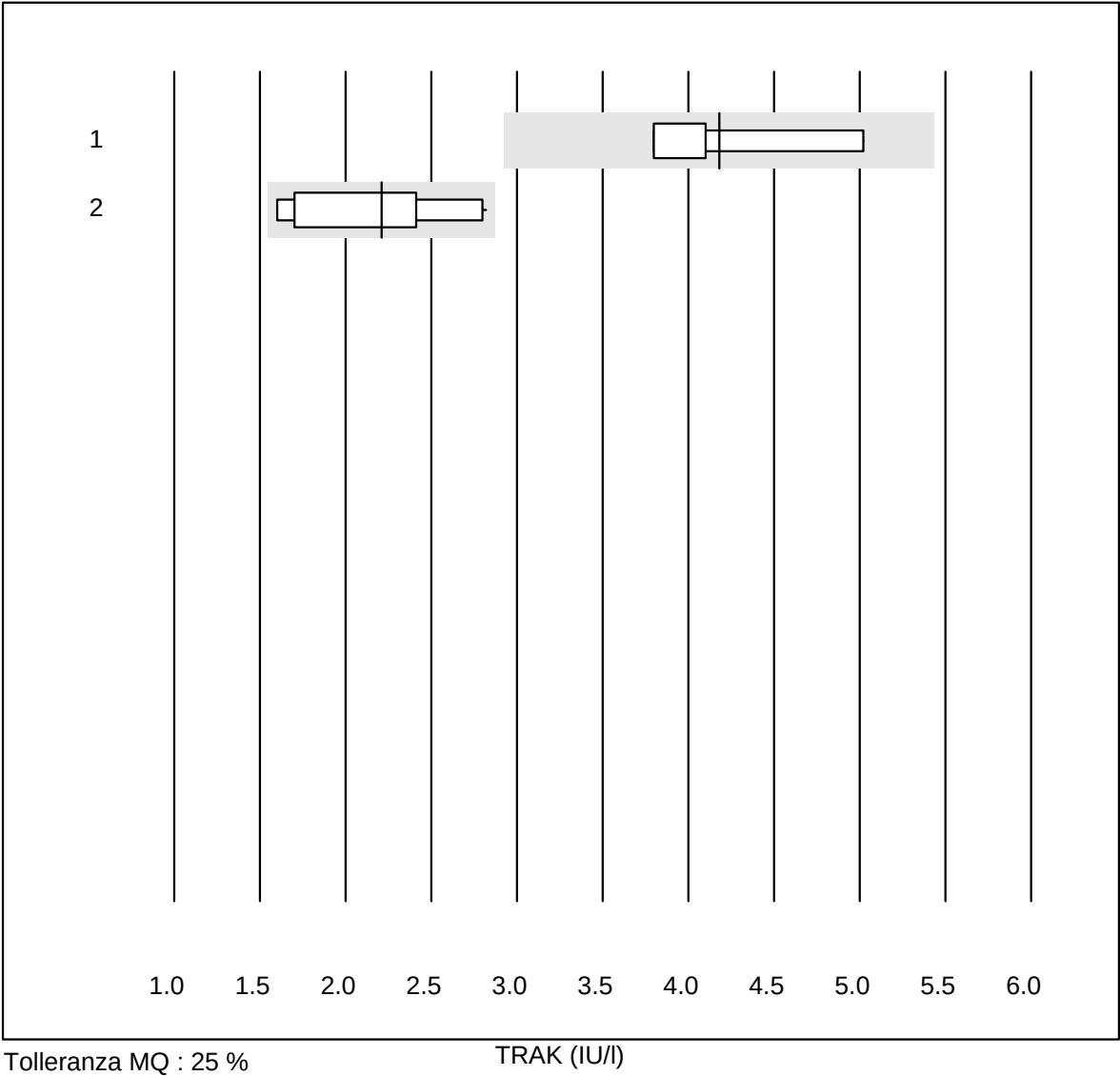


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	4.18	13.8	a
2	Roche	12	100.0	0.0	0.0	2.21	21.4	a
4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)								

Creatinina WB



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Statsensor i / Nova	83	84.4	10.8	4.8	165	10.6	e


eGFR CDK-EPI WB

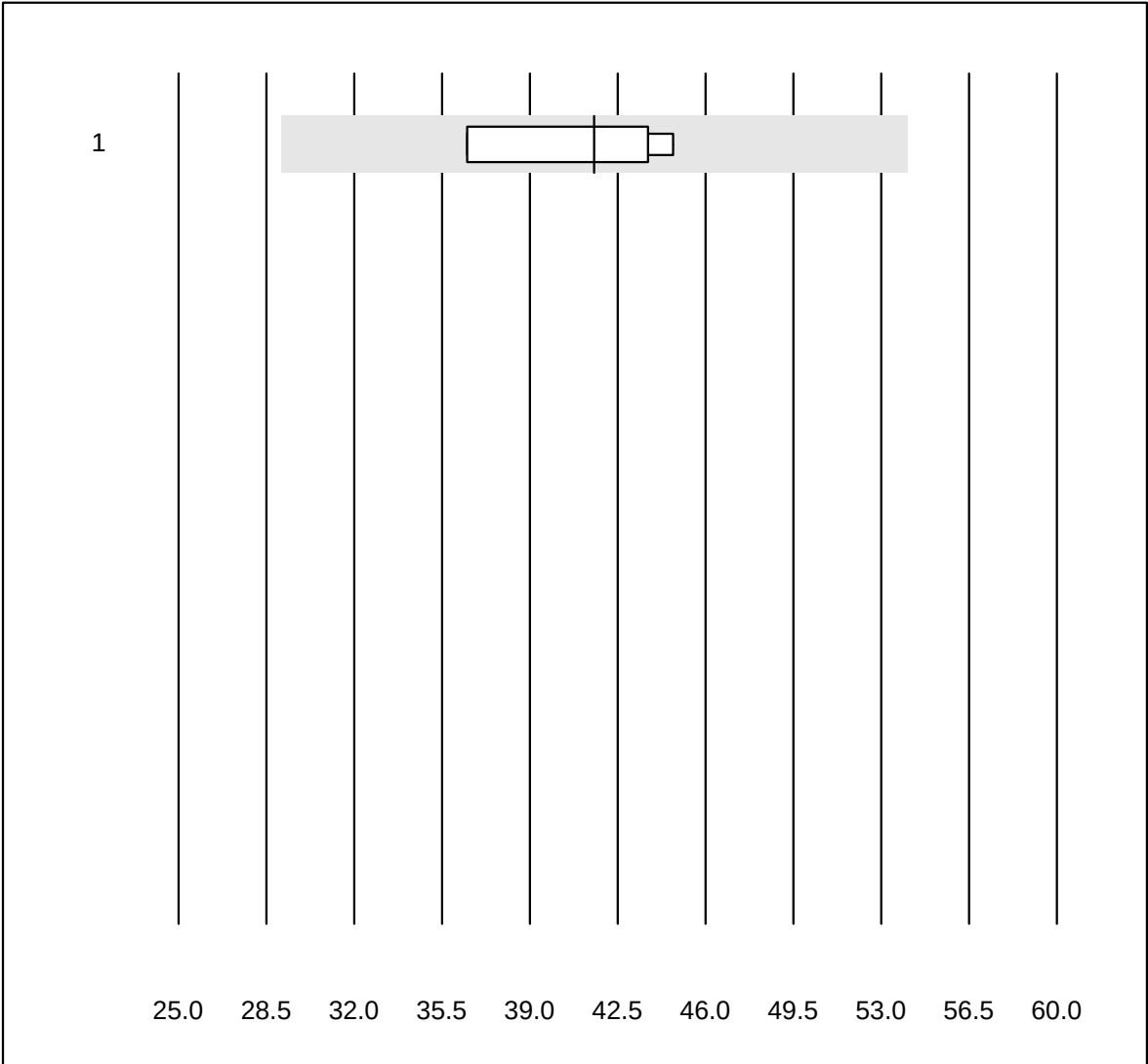

Tolleranza MQ : 30 % eGFR CDK-EPI WB ()

No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Statsensor i / Nova	4	100.0	0.0	0.0	42	9.3	e*

Keton WB

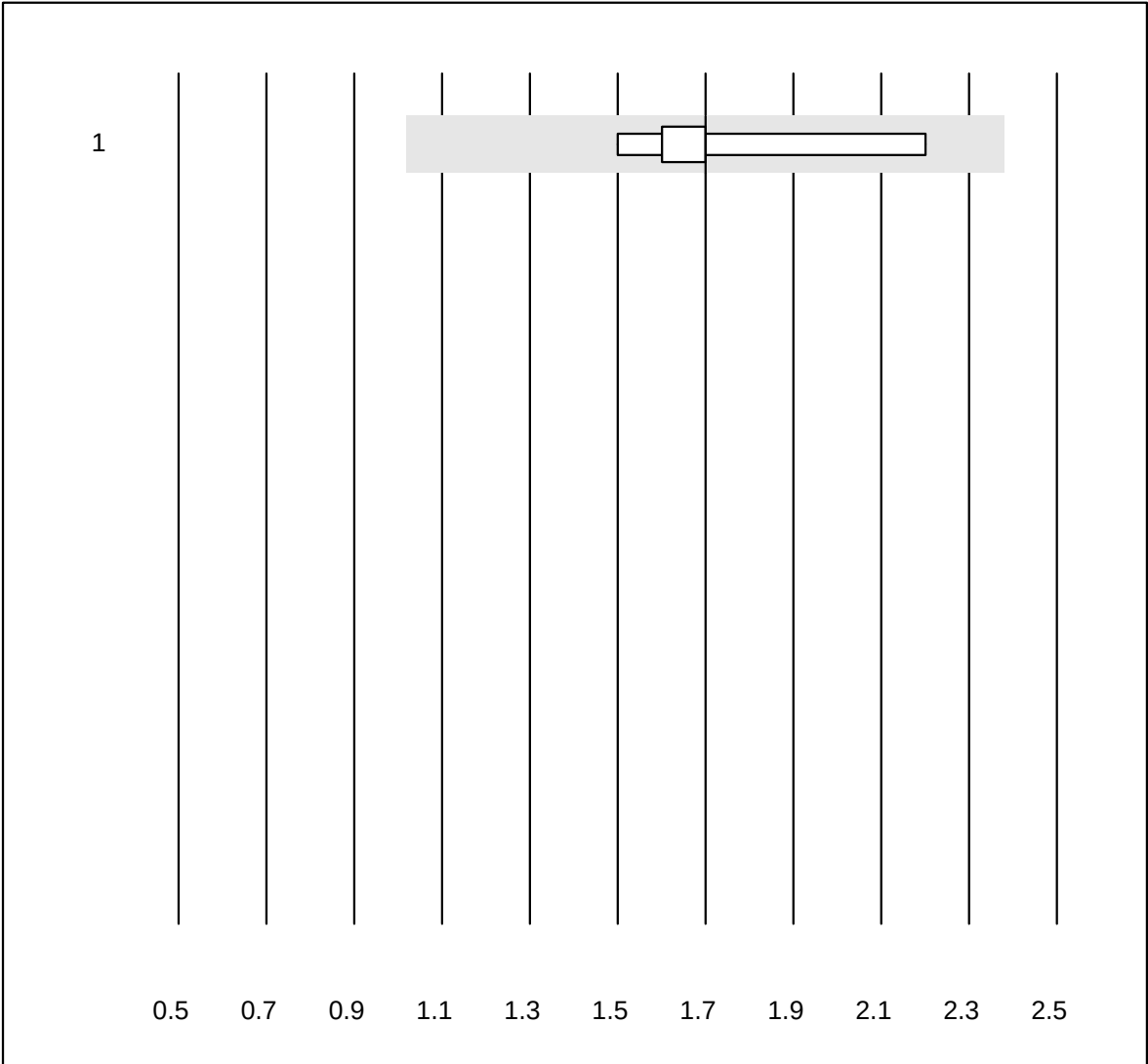


Tolleranza MQ : 40 %

Keton WB (mmol/l)


No.Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Ketosure APEXBIO	7	100.0	0.0	0.0	1.70	12.8	e*
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)							

IL6

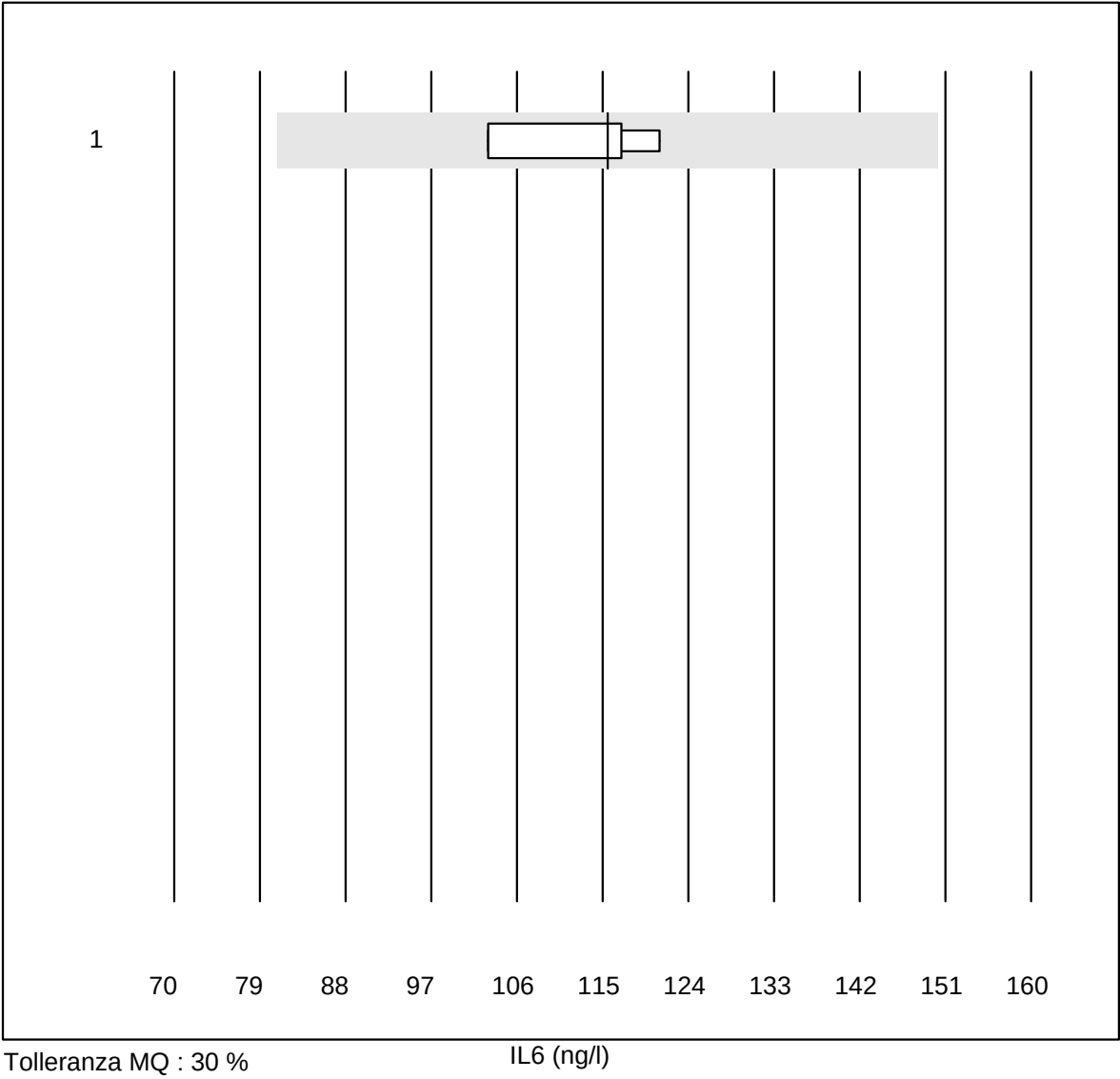


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	115.5	6.8	e

Elastase pancreatica

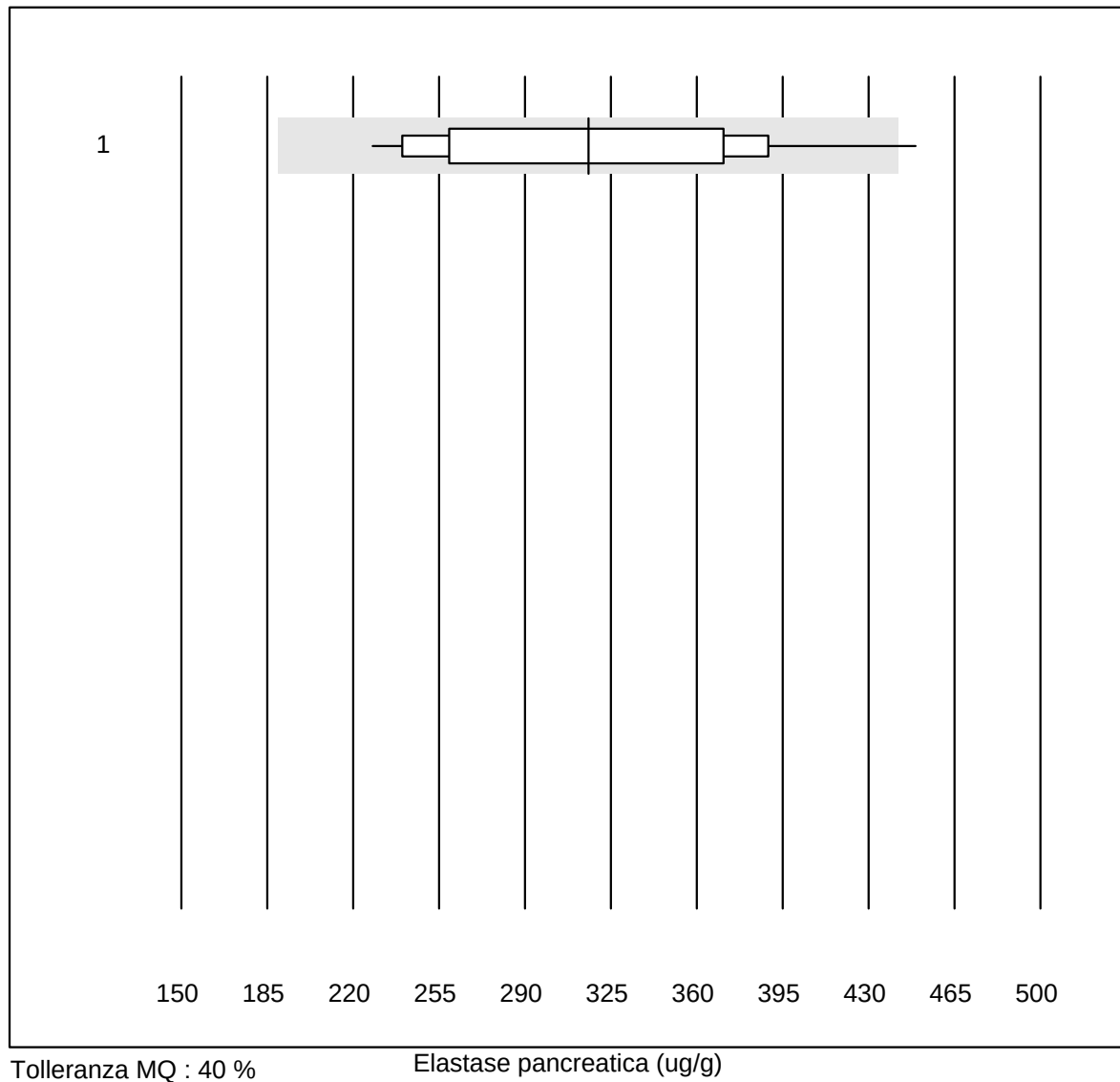


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Liaison	17	94.1	5.9	0.0	316	21.0	e*

Copeptina

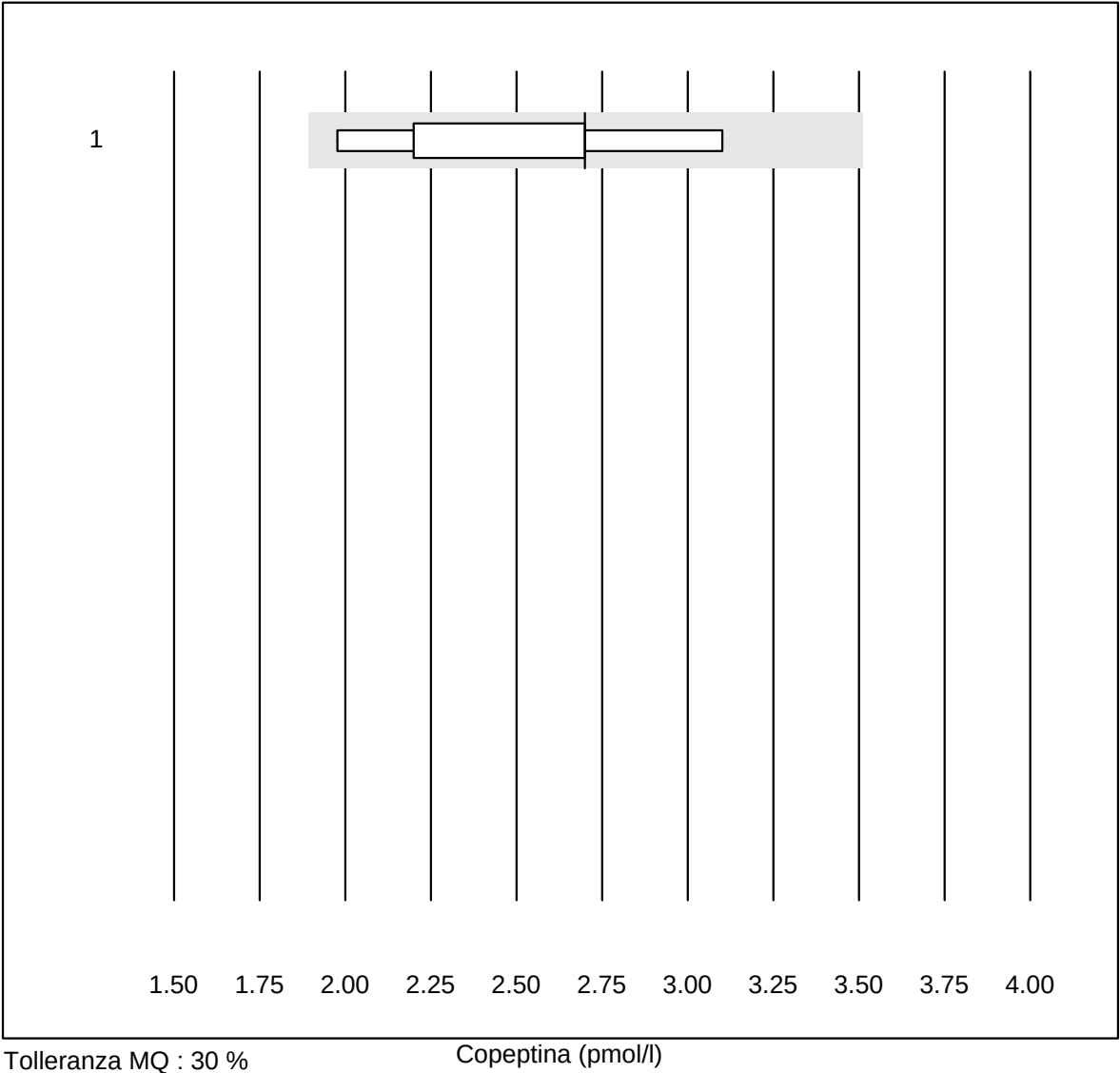


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Kryptor	7	100.0	0.0	0.0	2.7	14.5	e*

PIGF

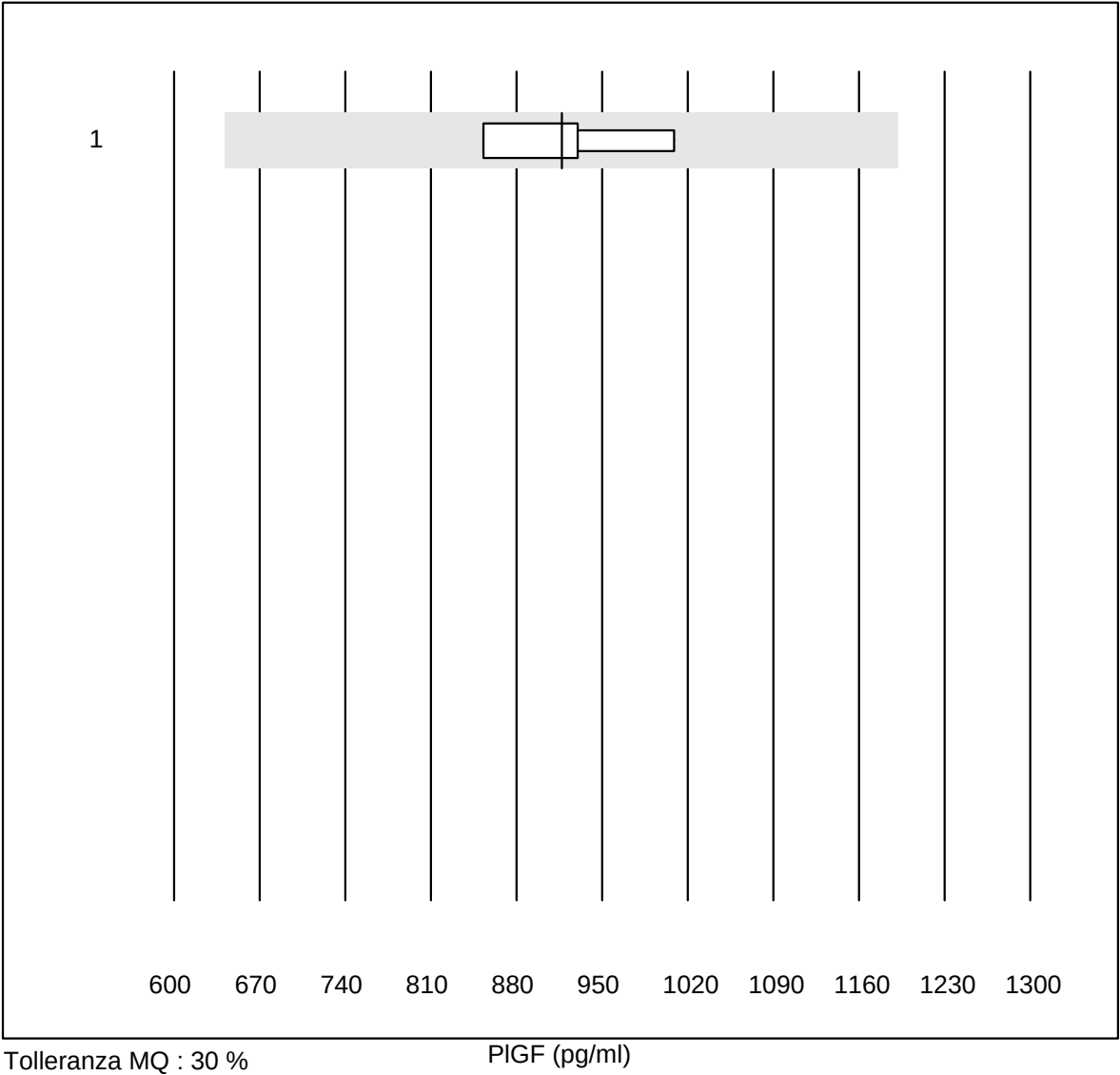


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	917.0	7.0	e

tHb

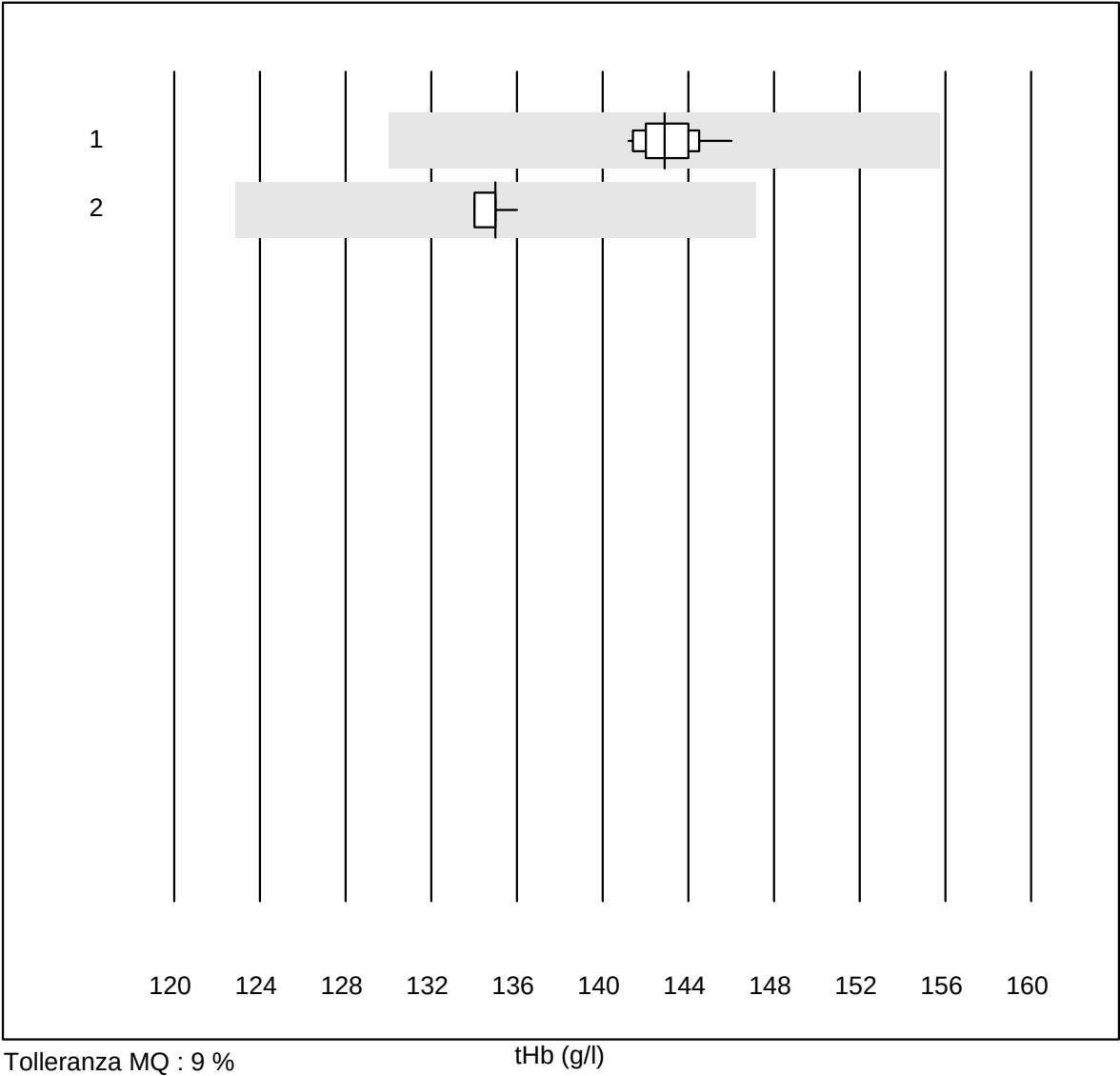

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	142.9	1.0	e
2	GEM	10	100.0	0.0	0.0	135.0	0.5	e

O2Hb

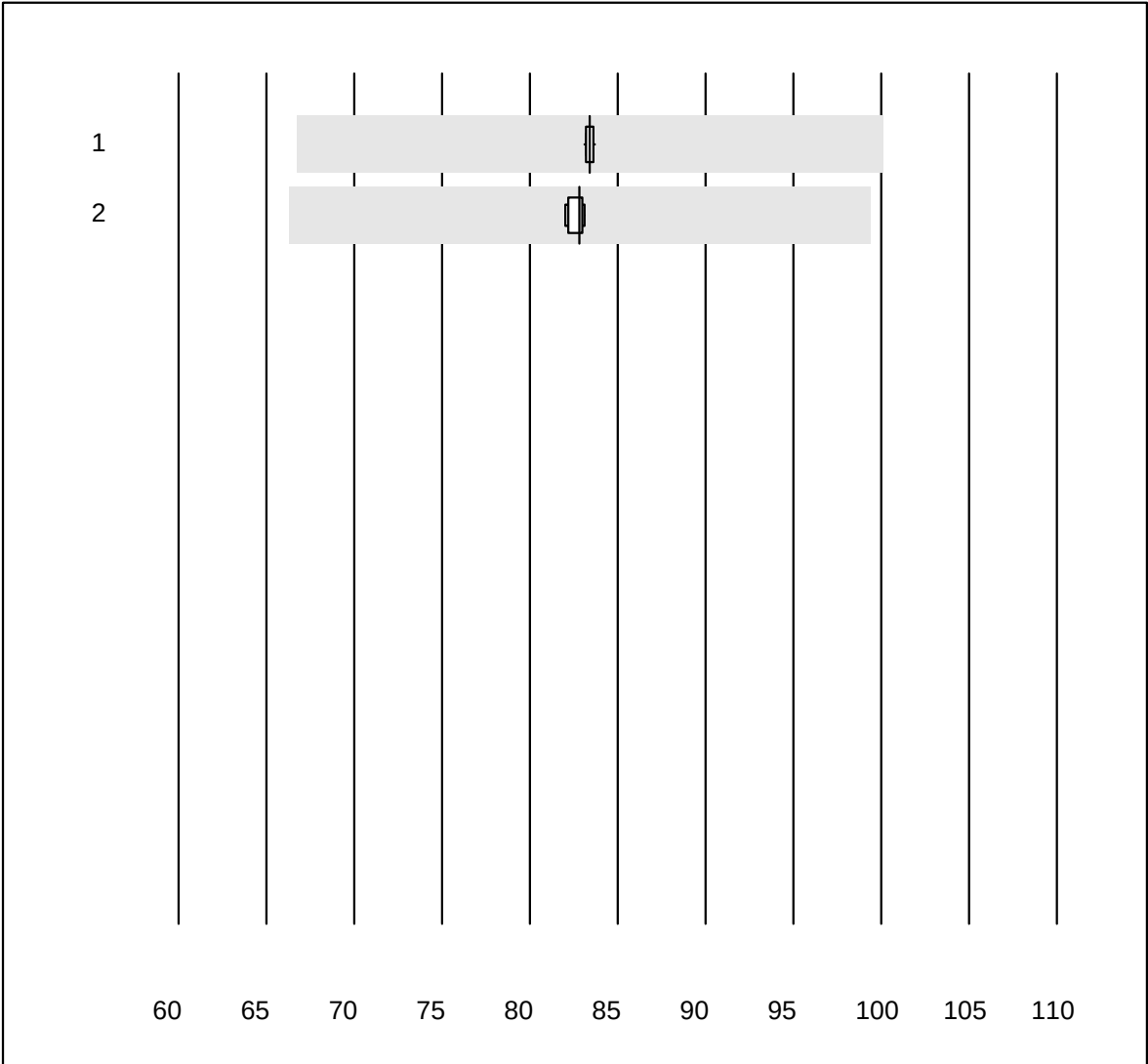


Tolleranza MQ : 20 %

O2Hb (%)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	83.4	0.2	e
2	GEM	9	100.0	0.0	0.0	82.8	0.5	e

COHb

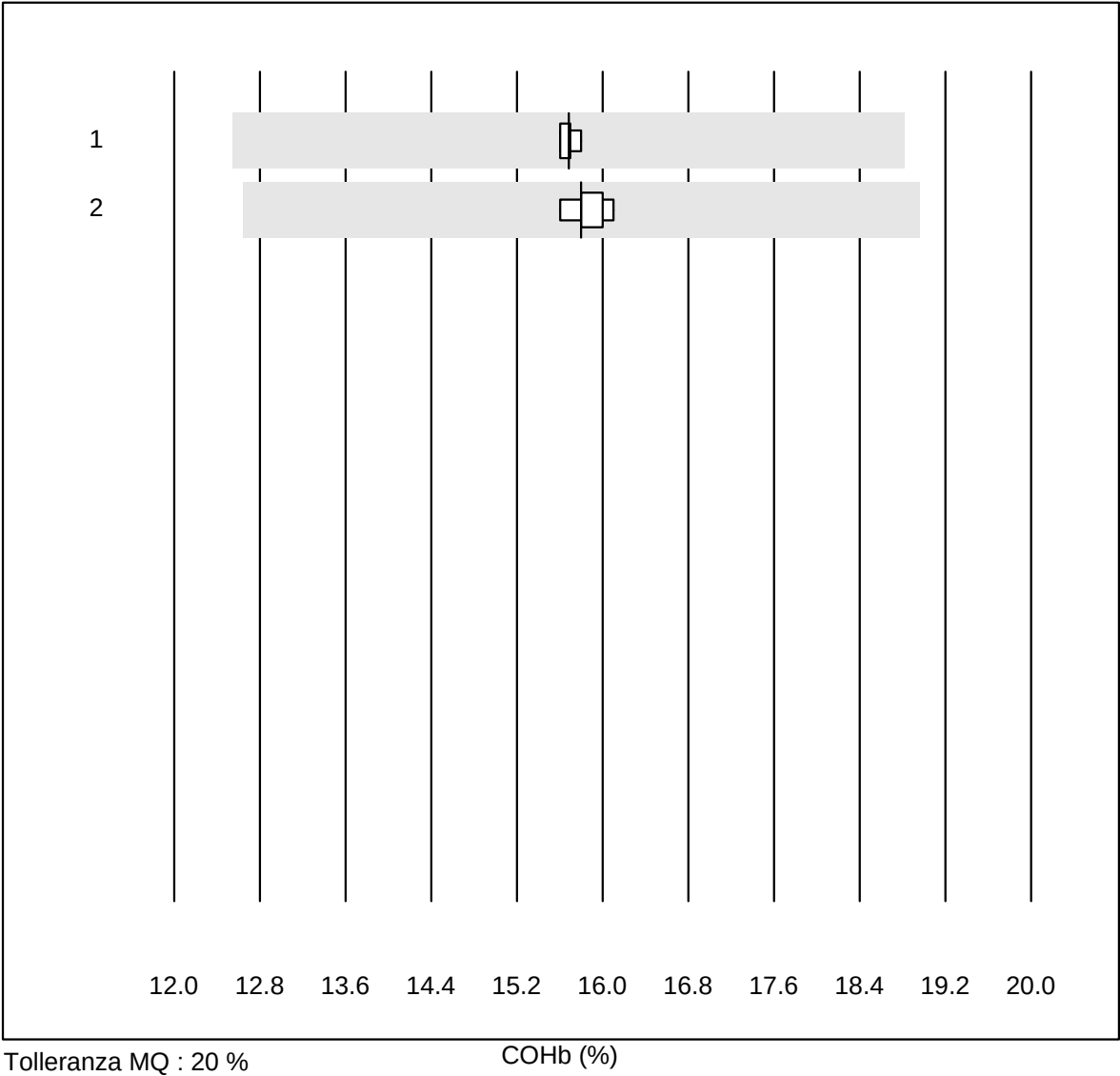


Tolleranza MQ : 20 %

COHb (%)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	15.7	0.5	e
2	GEM	9	100.0	0.0	0.0	15.8	1.0	e

Un risultato è stato presentato ma non pubblicato perché il gruppo del metodo era troppo piccolo. (<4 risultati per gruppo)


MetHb

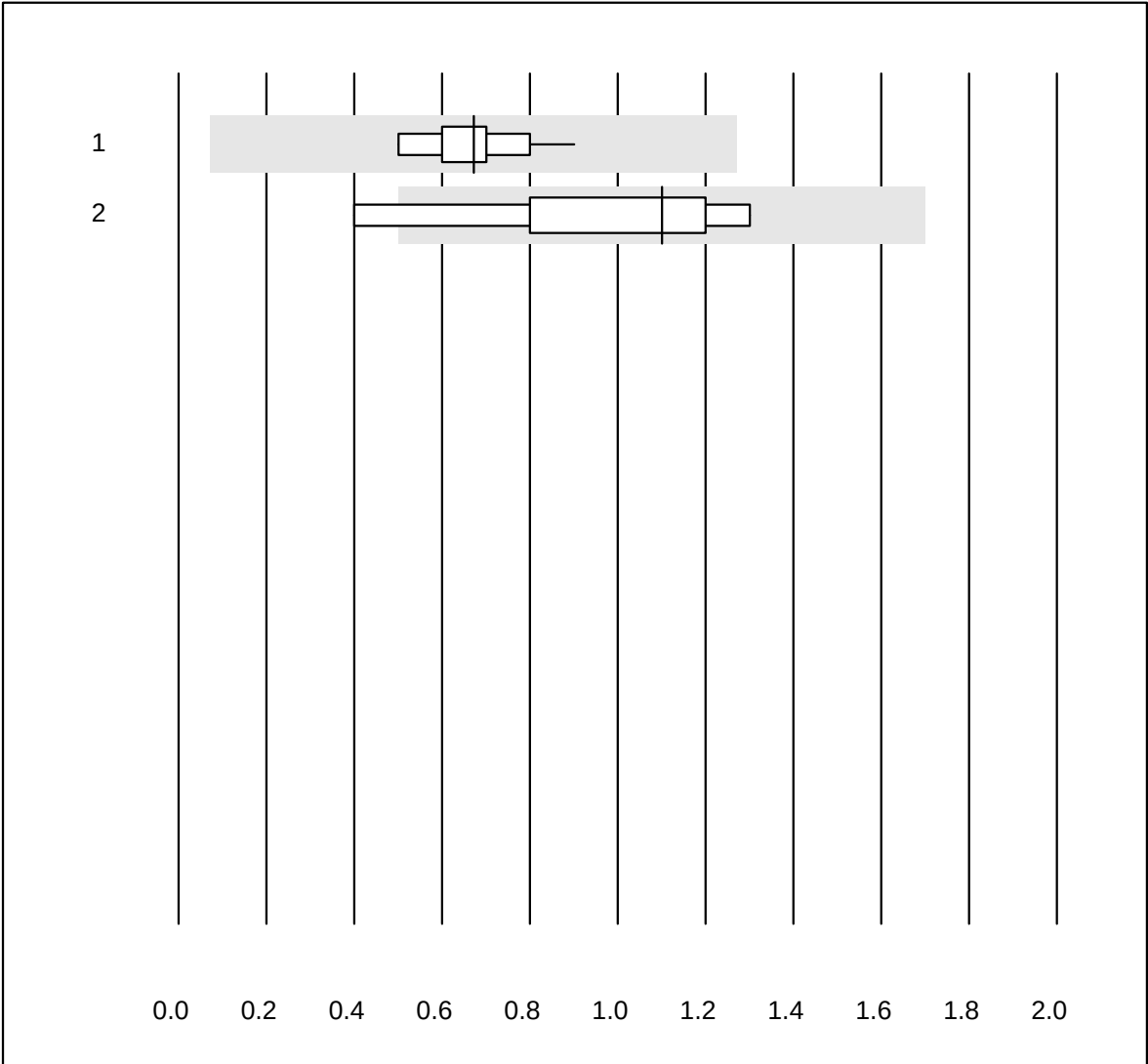

Tolleranza MQ : 20 %
(< 3.0: +/- 0.6 %)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	0.7	17.7	e*
2	GEM	9	88.9	11.1	0.0	1.1	30.0	e*

HHb

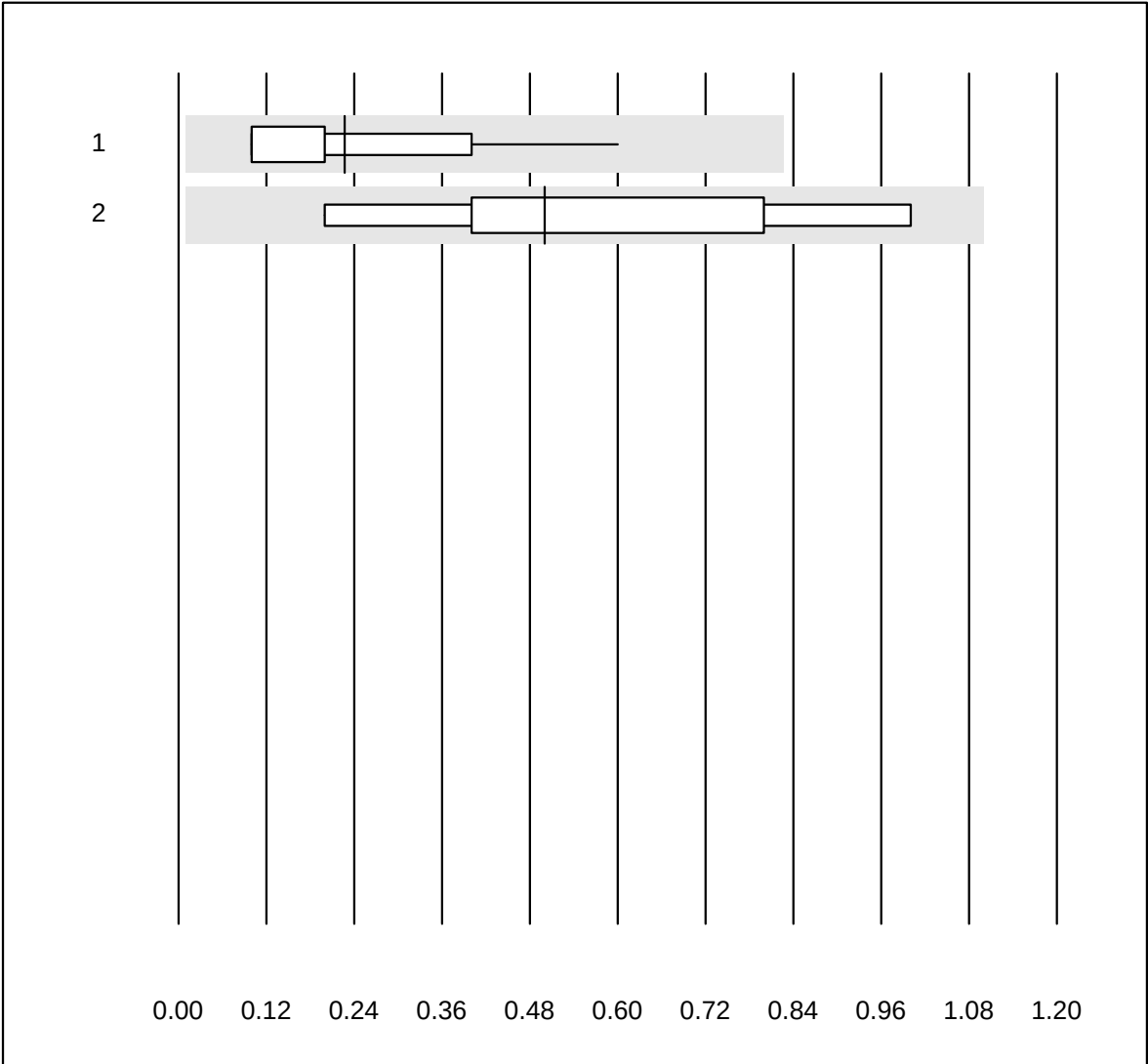


Tolleranza MQ : 20 %
(< 3.0: +/- 0.6 %)

HHb (%)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	0.2	65.5	e*
2	GEM	9	100.0	0.0	0.0	0.5	42.8	e*

sO2

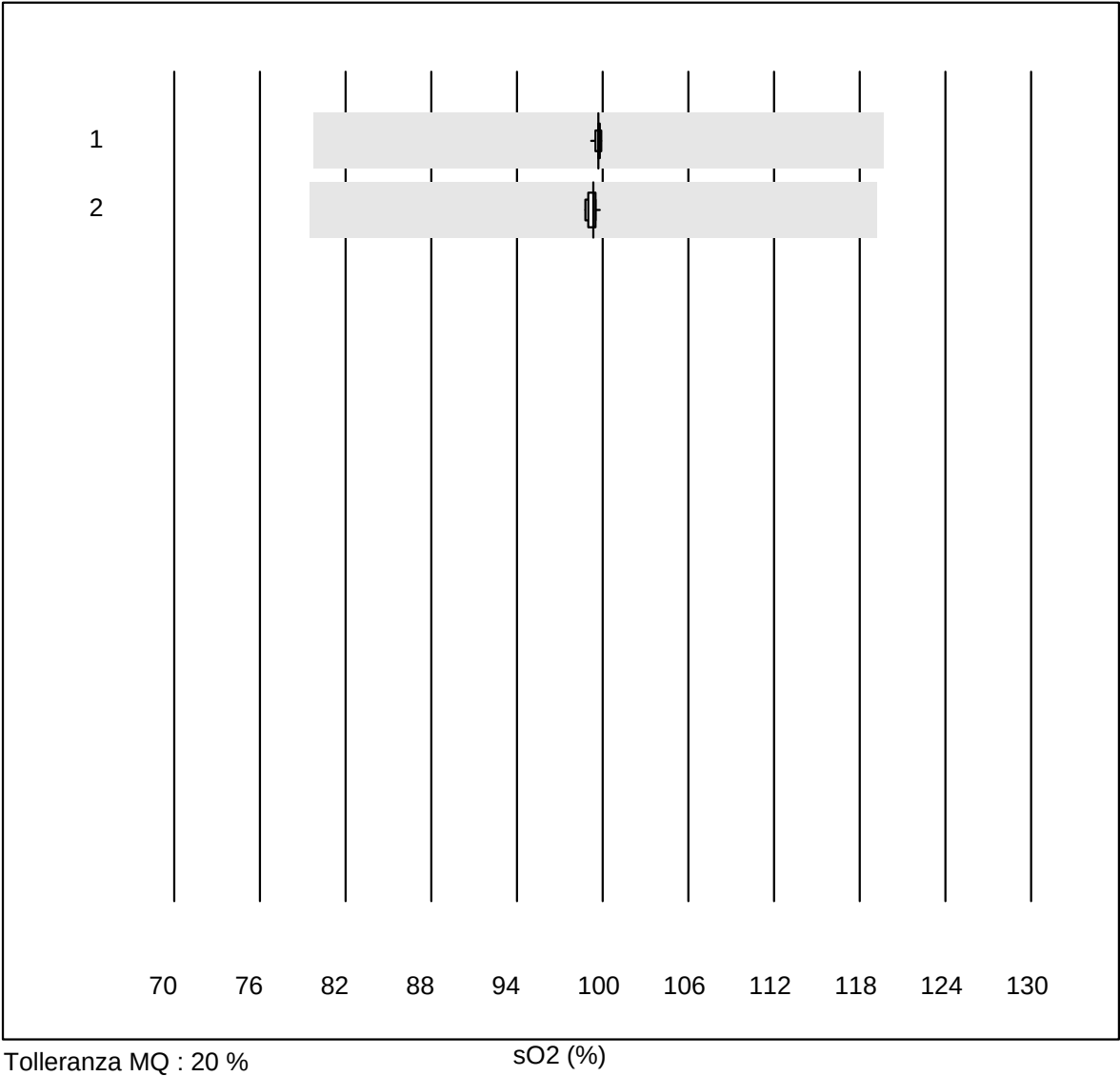

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	99.7	0.2	e
2	GEM	10	100.0	0.0	0.0	99.4	0.3	e


Sangue occulto qn

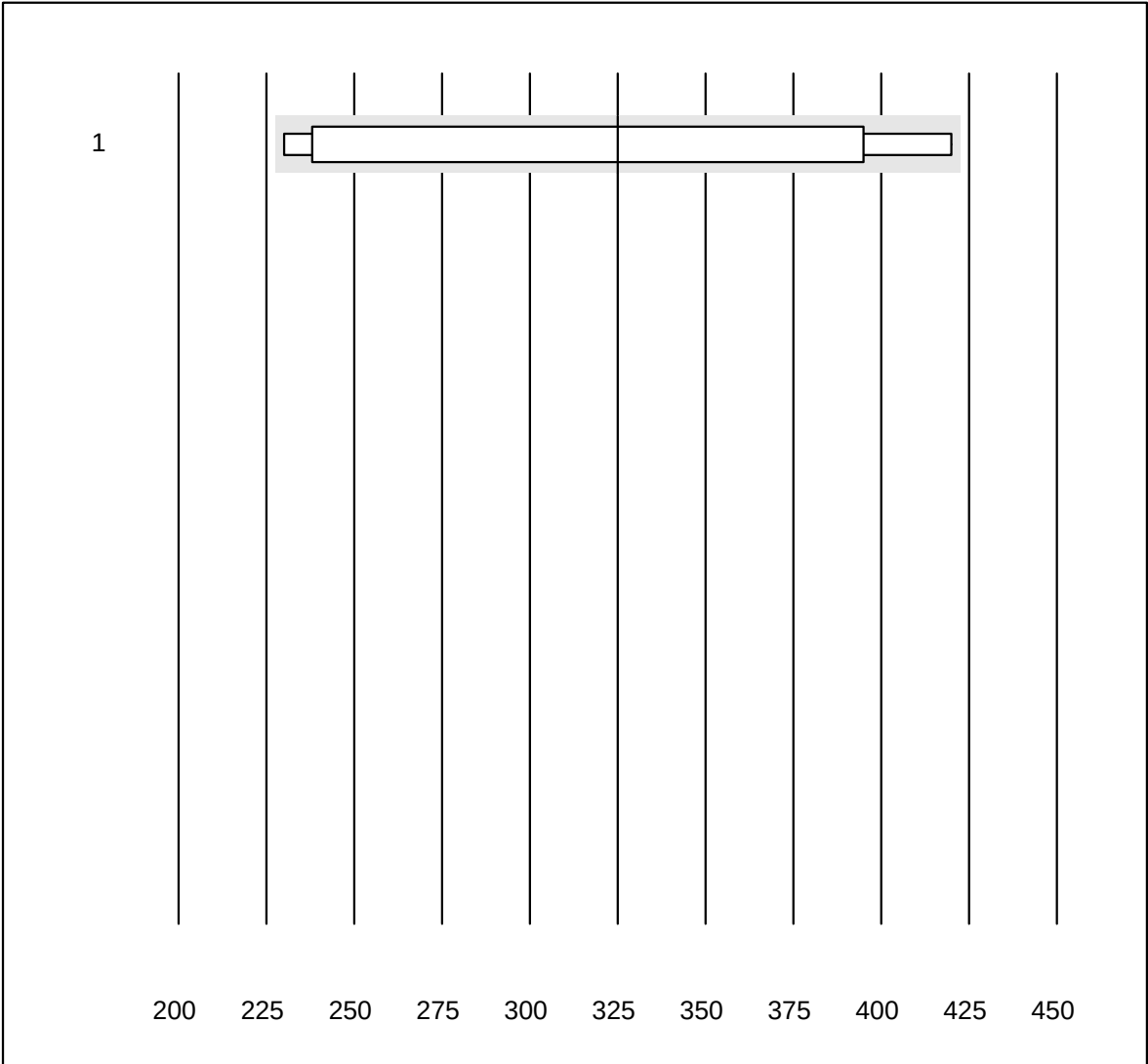

QUALAB Tolleranza : 30 % Sangue occulto qn (ng/ml)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	OC-Sensor	8	87.5	0.0	12.5	325	24.0	a

Amilasi-urine

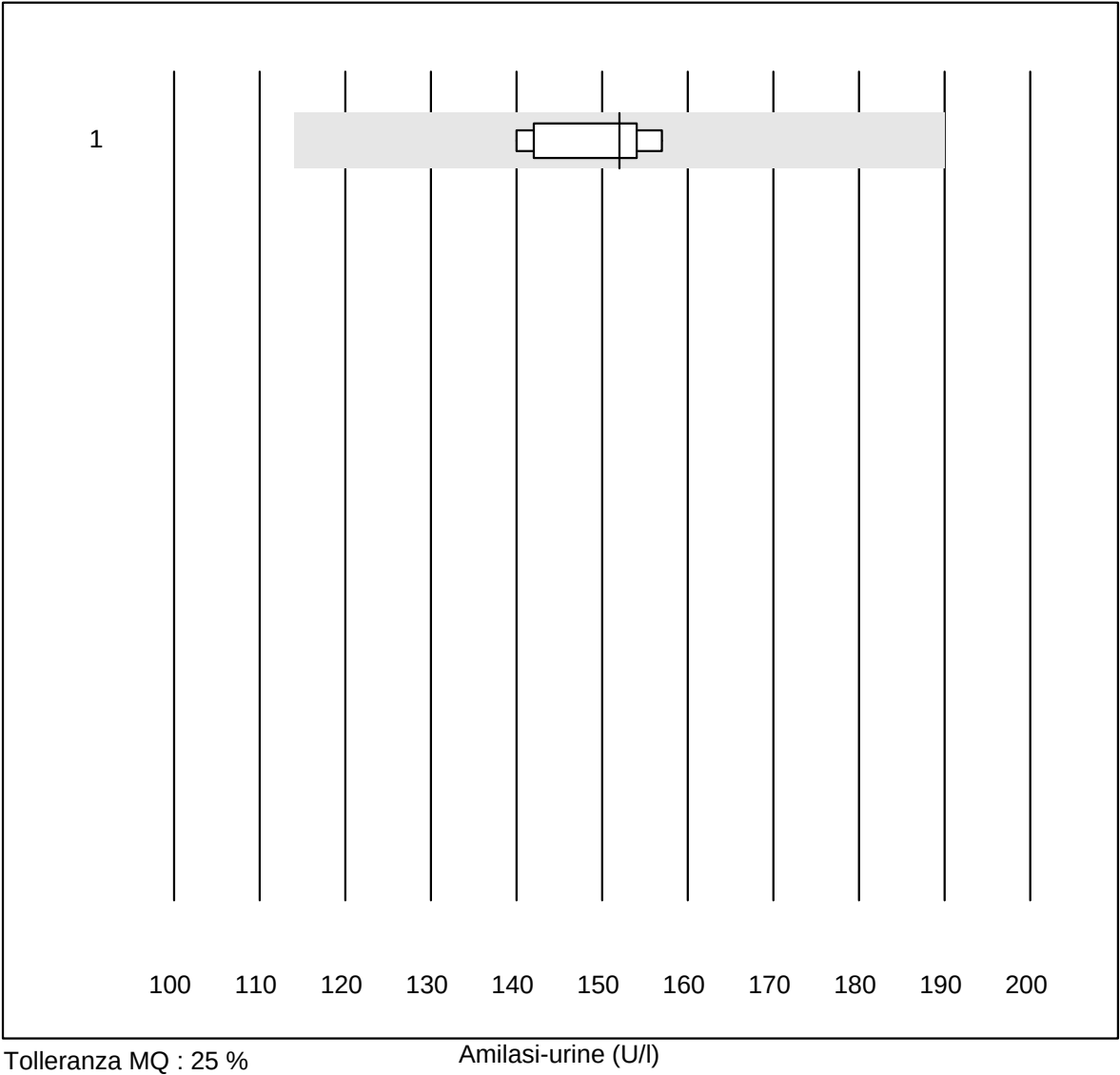

Tolleranza MQ : 25 %

Amilasi-urine (U/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 IFCC	6	100.0	0.0	0.0	152	4.6	e


Calcio-urine



Tolleranza MQ : 9 %

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	19	100.0	0.0	0.0	2.45	2.5	e
2	Abbott	8	100.0	0.0	0.0	2.30	2.1	e
3	altri metodi	5	80.0	0.0	20.0	2.50	1.7	e

Cloro-urine

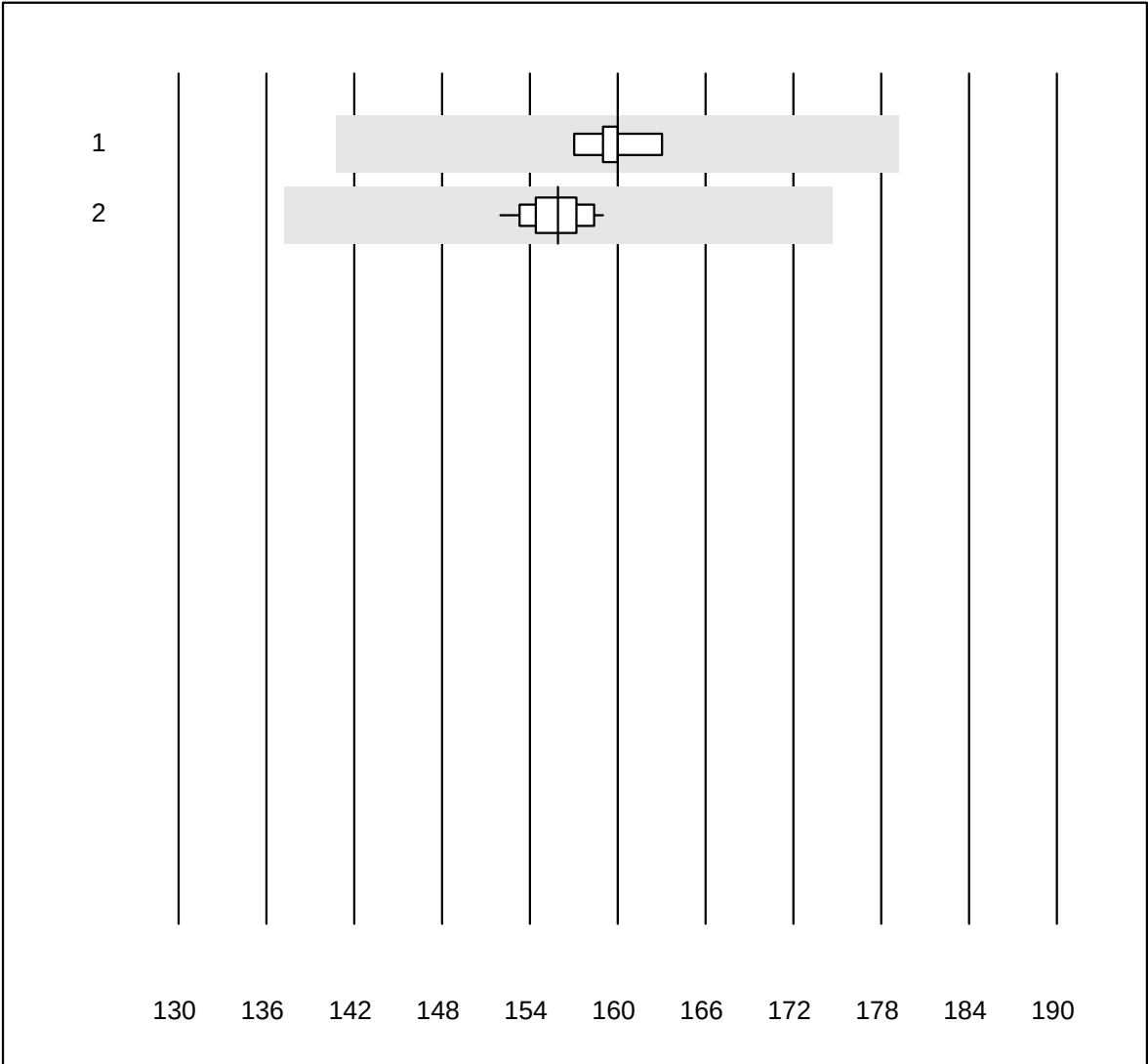

Tolleranza MQ : 12 %

Cloro-urine (mmol/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	9	100.0	0.0	0.0	160	1.1	e
2	Roche	15	100.0	0.0	0.0	156	1.3	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Glucosio-urine



No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Chimica umida	26	96.2	0.0	3.8	12.0	2.0	e

Magnesio-urine

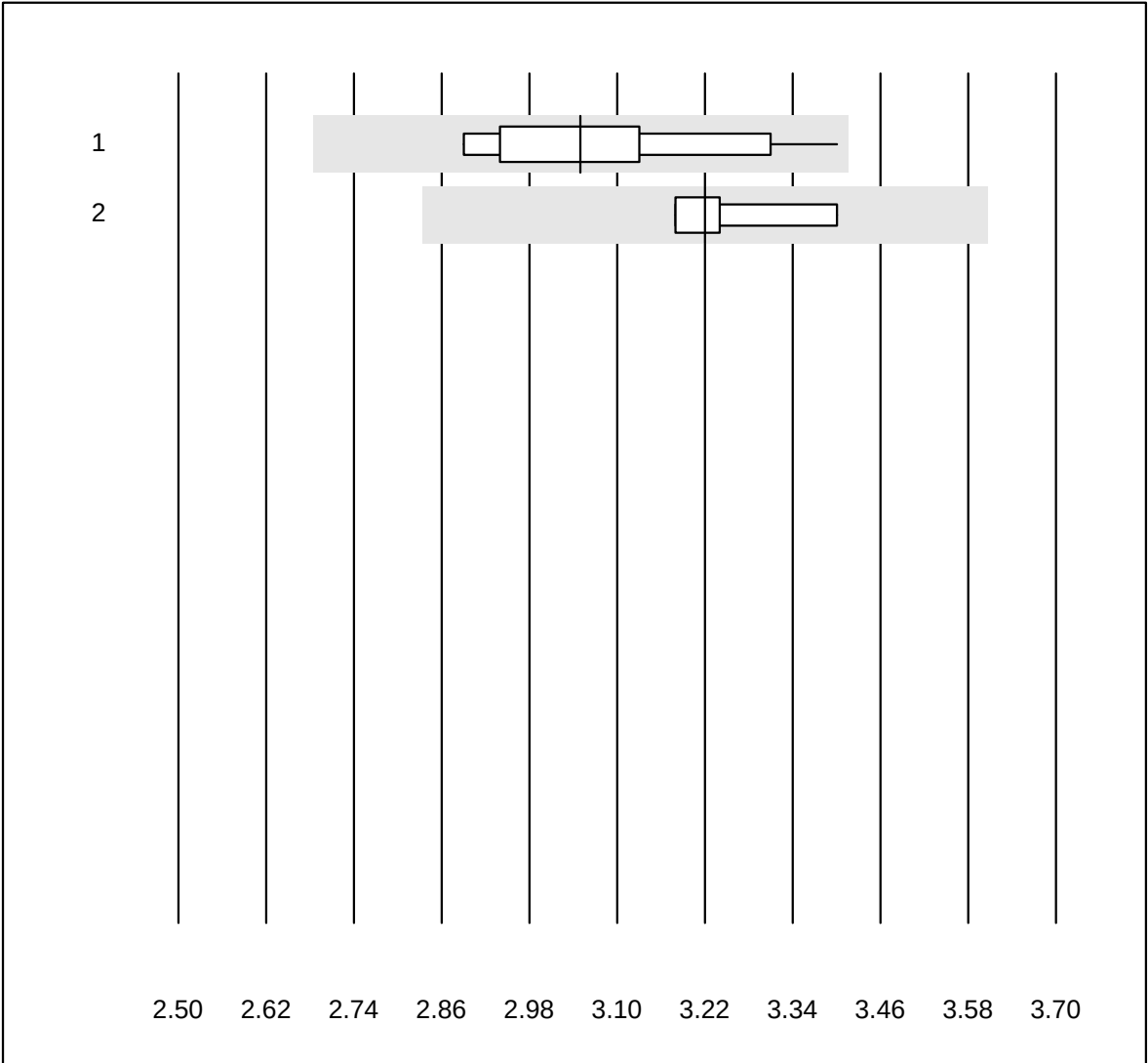


Tolleranza MQ : 12 %

Magnesio-urine (mmol/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Chimica umida	18	94.4	0.0	5.6	3.05	5.0	e
2	AAS	4	100.0	0.0	0.0	3.22	3.1	e*

Osmolalità-urine

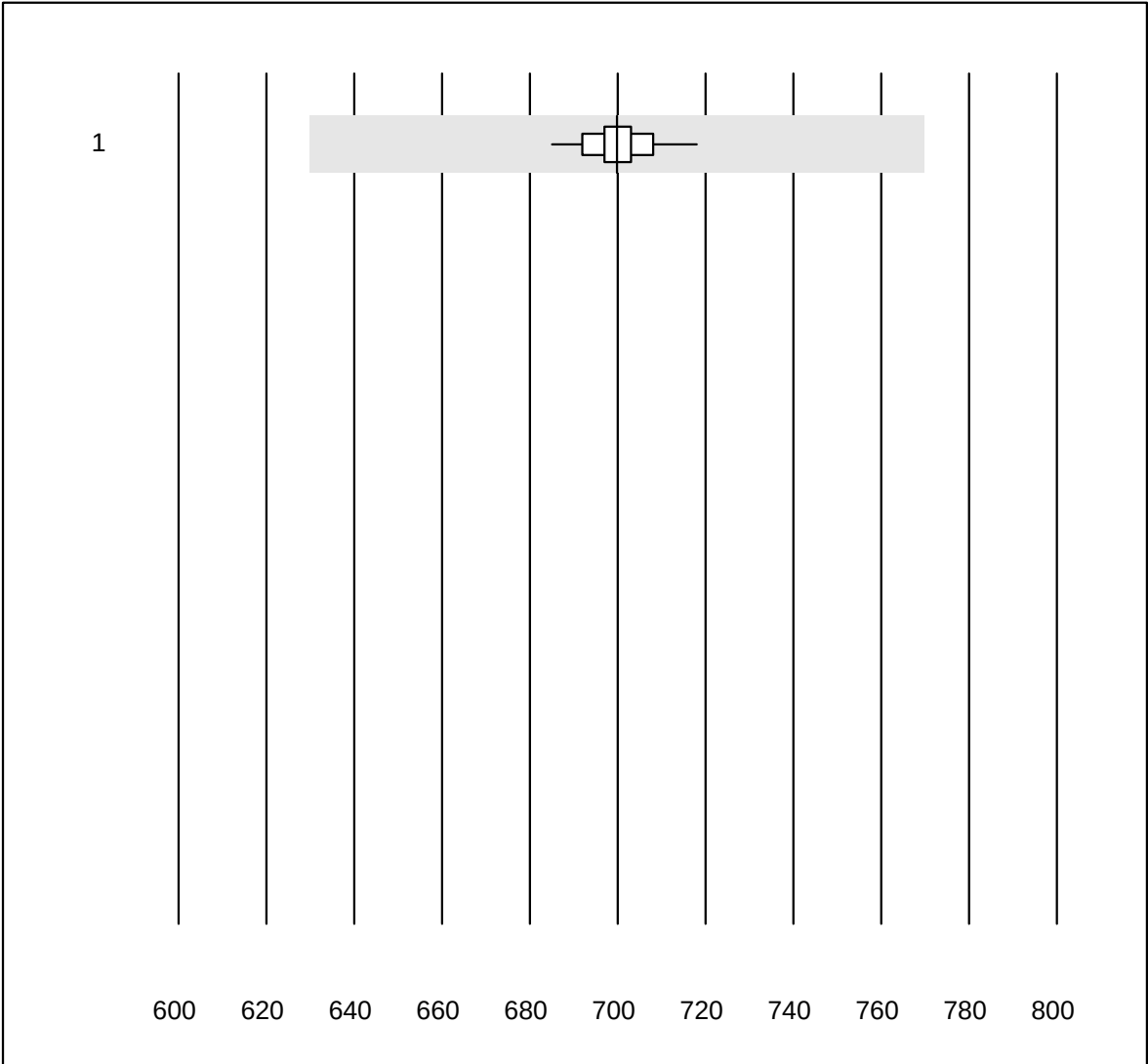


Tolleranza MQ : 10 %

Osmolalità-urine (mosm/kg)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Crioscopia	23	100.0	0.0	0.0	700	1.0	e

Fosforo-urine

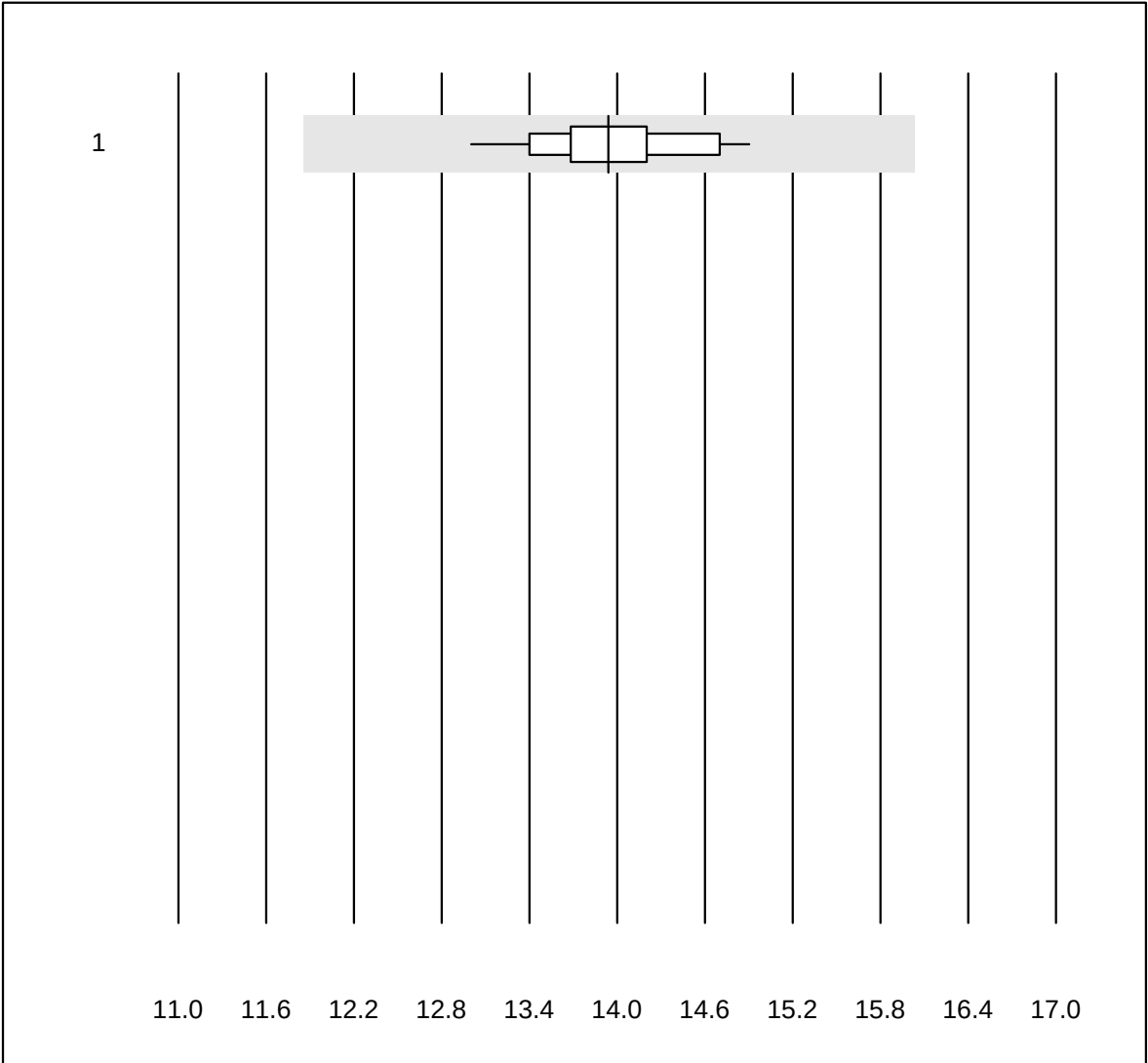


Tolleranza MQ : 15 %

Fosforo-urine (mmol/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Chimica umida	26	100.0	0.0	0.0	13.9	3.4	e

Potassio-urine

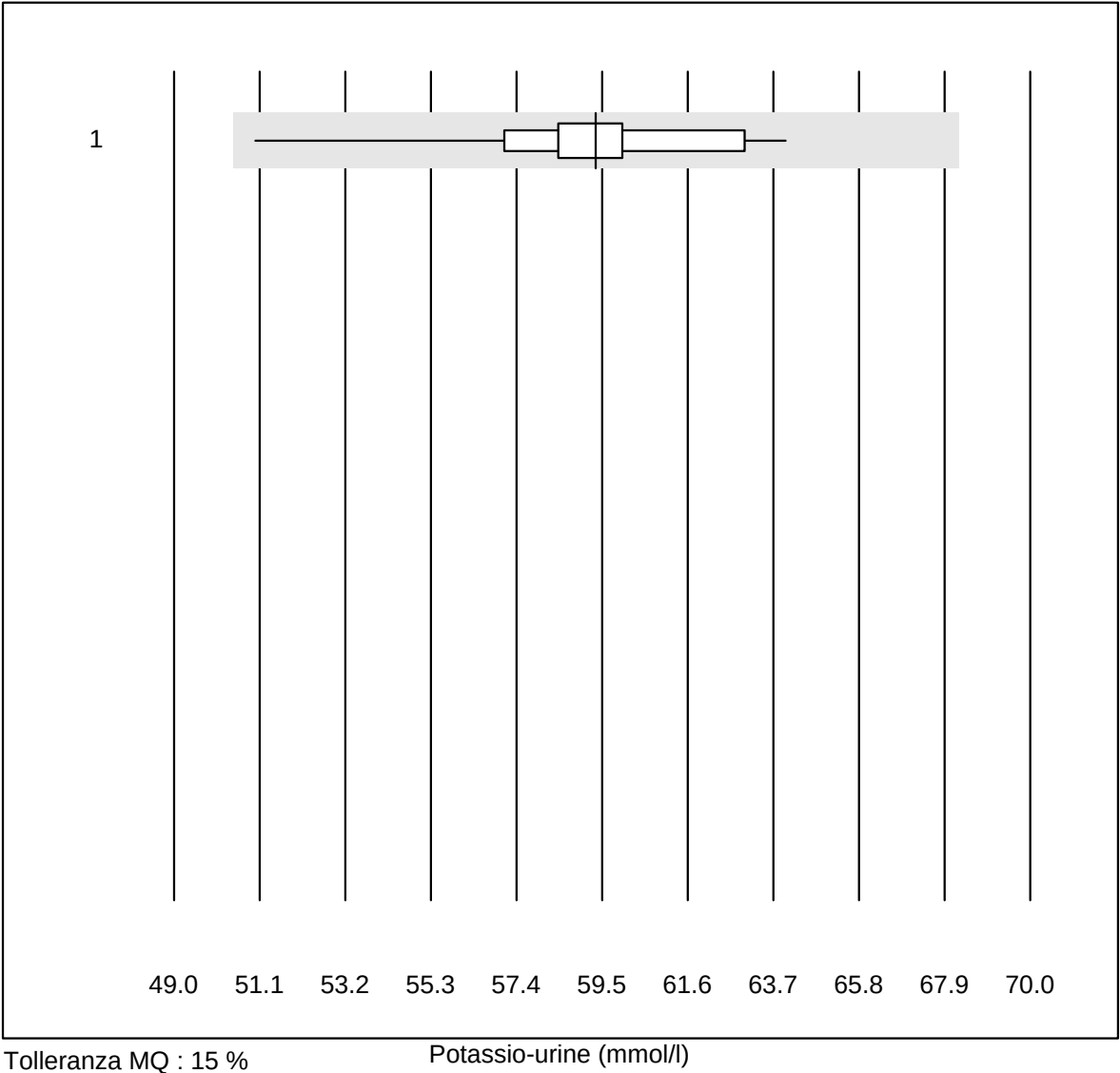

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	39	97.4	0.0	2.6	59	3.7	e

Proteina-urine

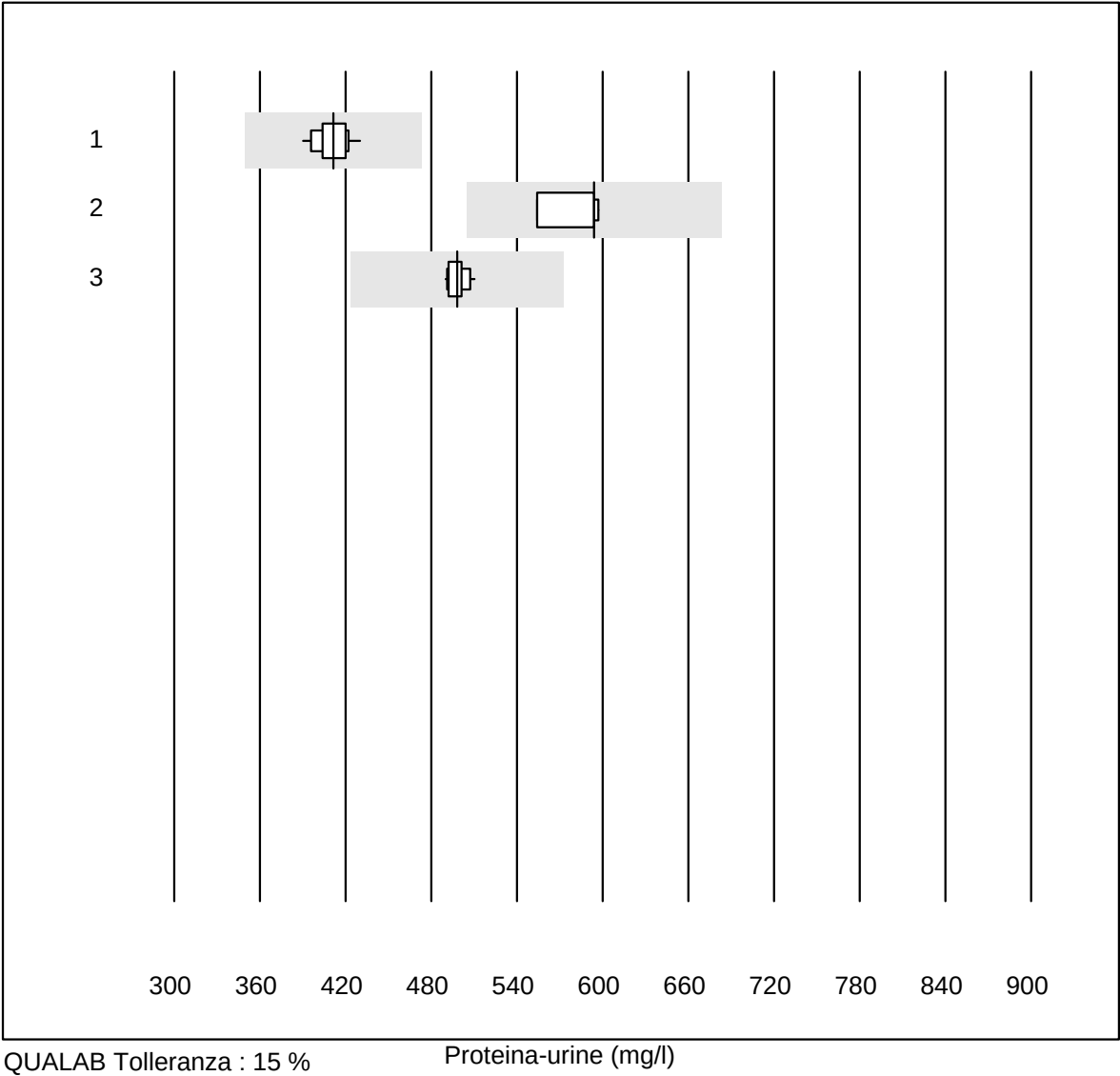


QUALAB Tolleranza : 15 %

Proteina-urine (mg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Roche	25	100.0	0.0	0.0	411.6	2.6	e
2	Dimension	5	80.0	0.0	20.0	594.0	3.6	e
3	Abbott	12	100.0	0.0	0.0	498.1	1.3	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Sodio-urine

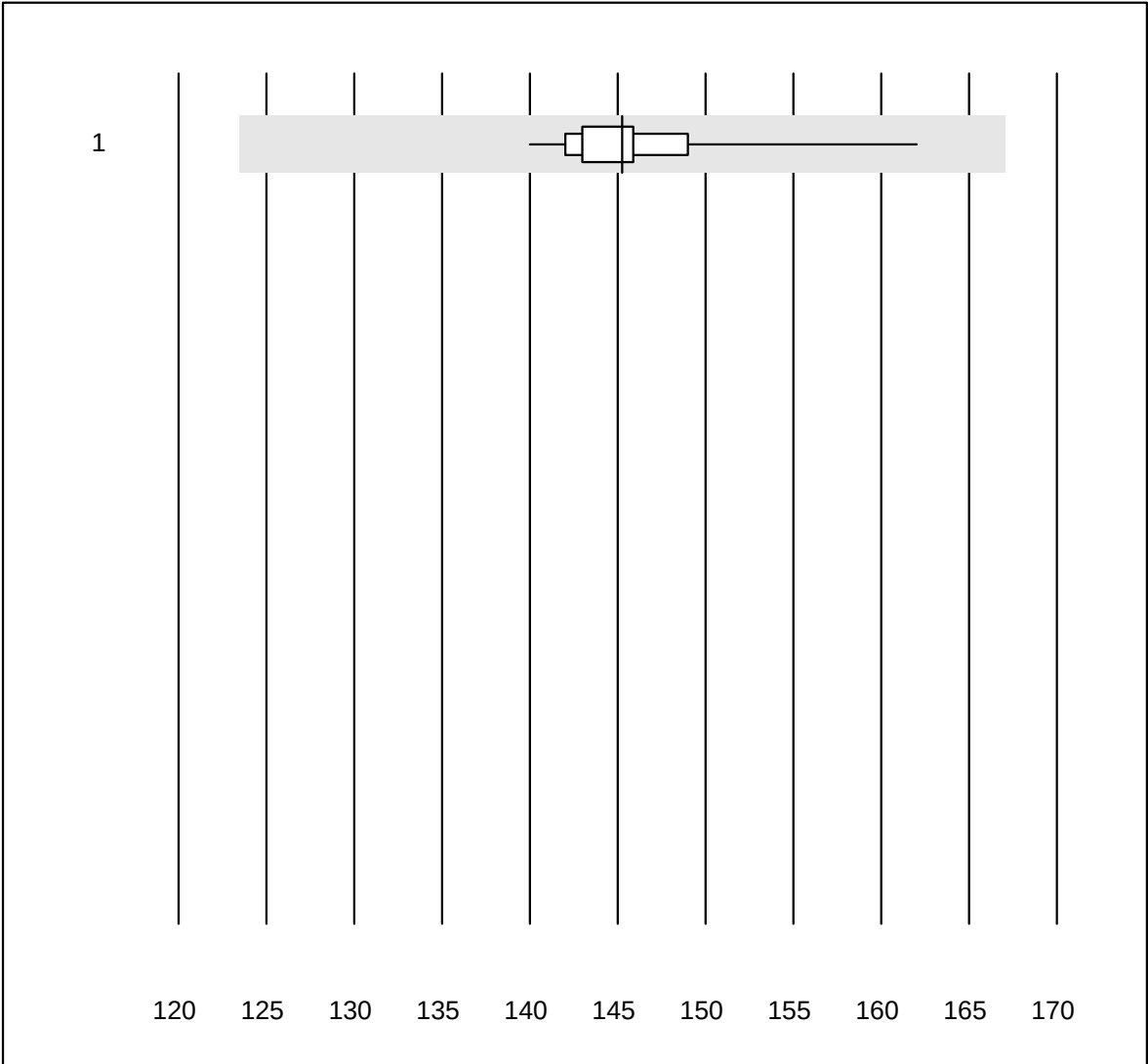


Tolleranza MQ : 15 %

Sodio-urine (mmol/l)


No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	39	97.4	0.0	2.6	145	2.8	e

Urea-urine

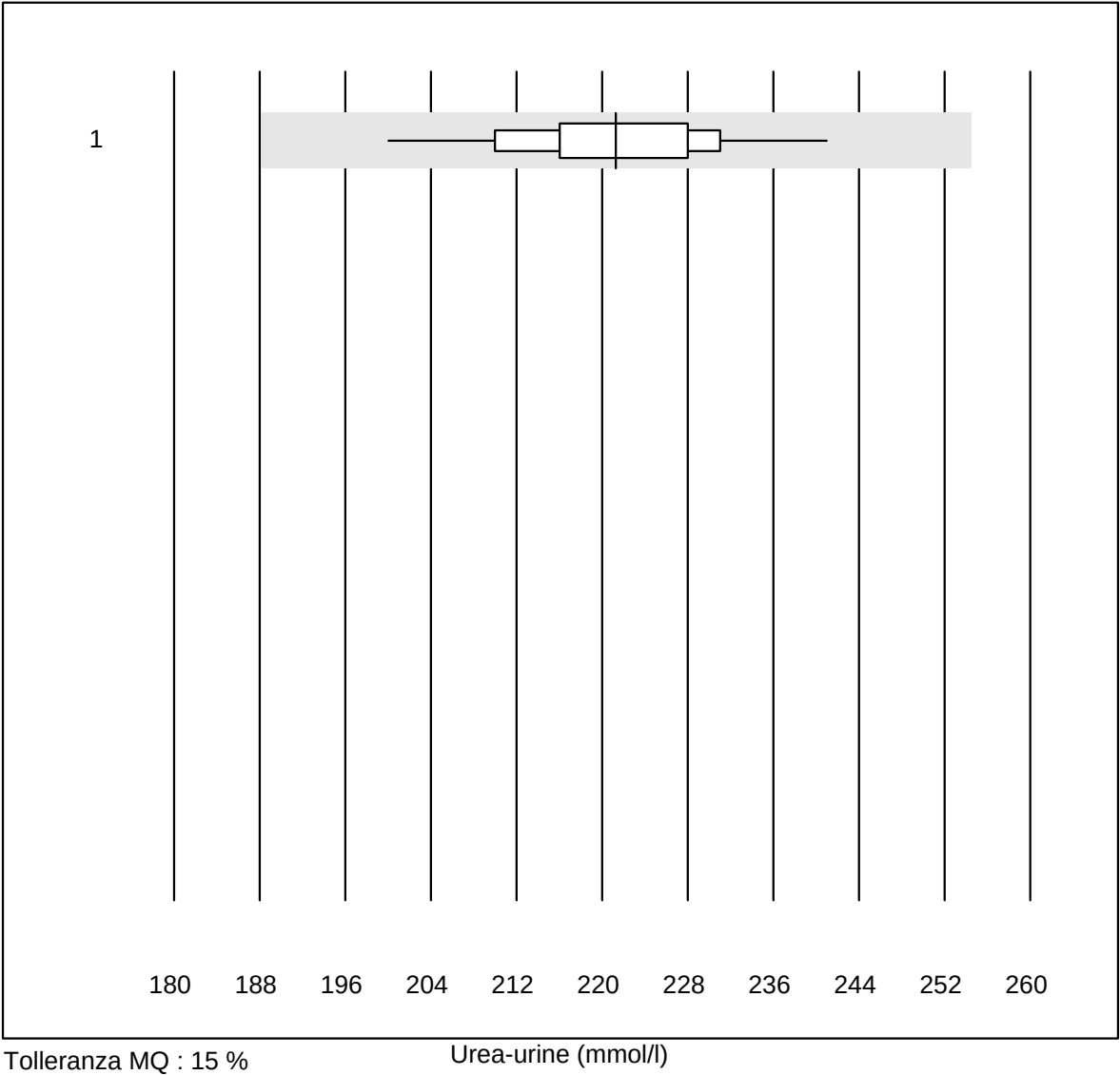


No.	Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Chimica umida	35	100.0	0.0	0.0	221	4.0	e
2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)								

Acido urico-urine

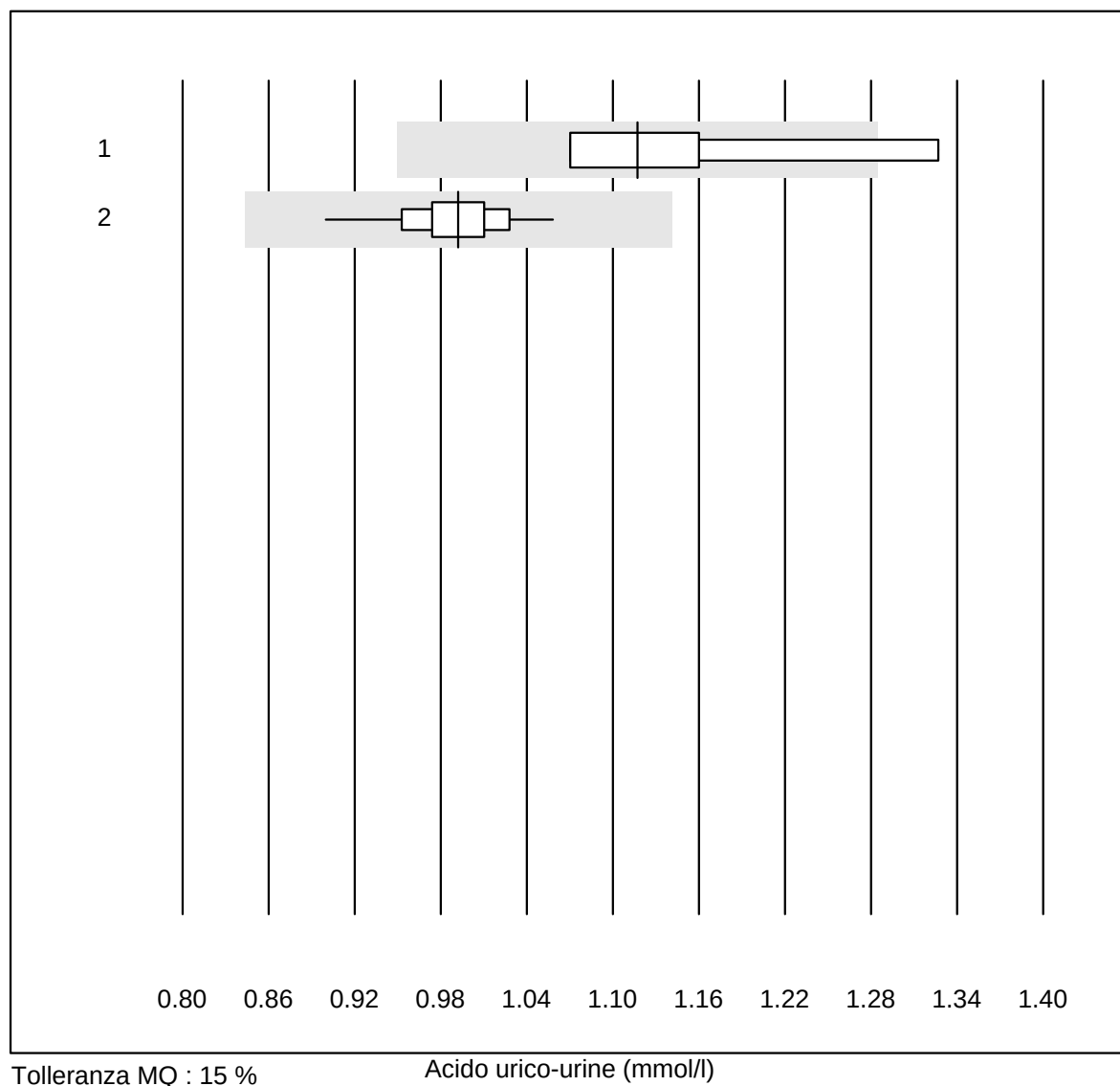

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Siemens	4	75.0	25.0	0.0	1.12	10.4	e*
2	Chimica umida	25	100.0	0.0	0.0	0.99	3.8	e

Peso Specifico-urine

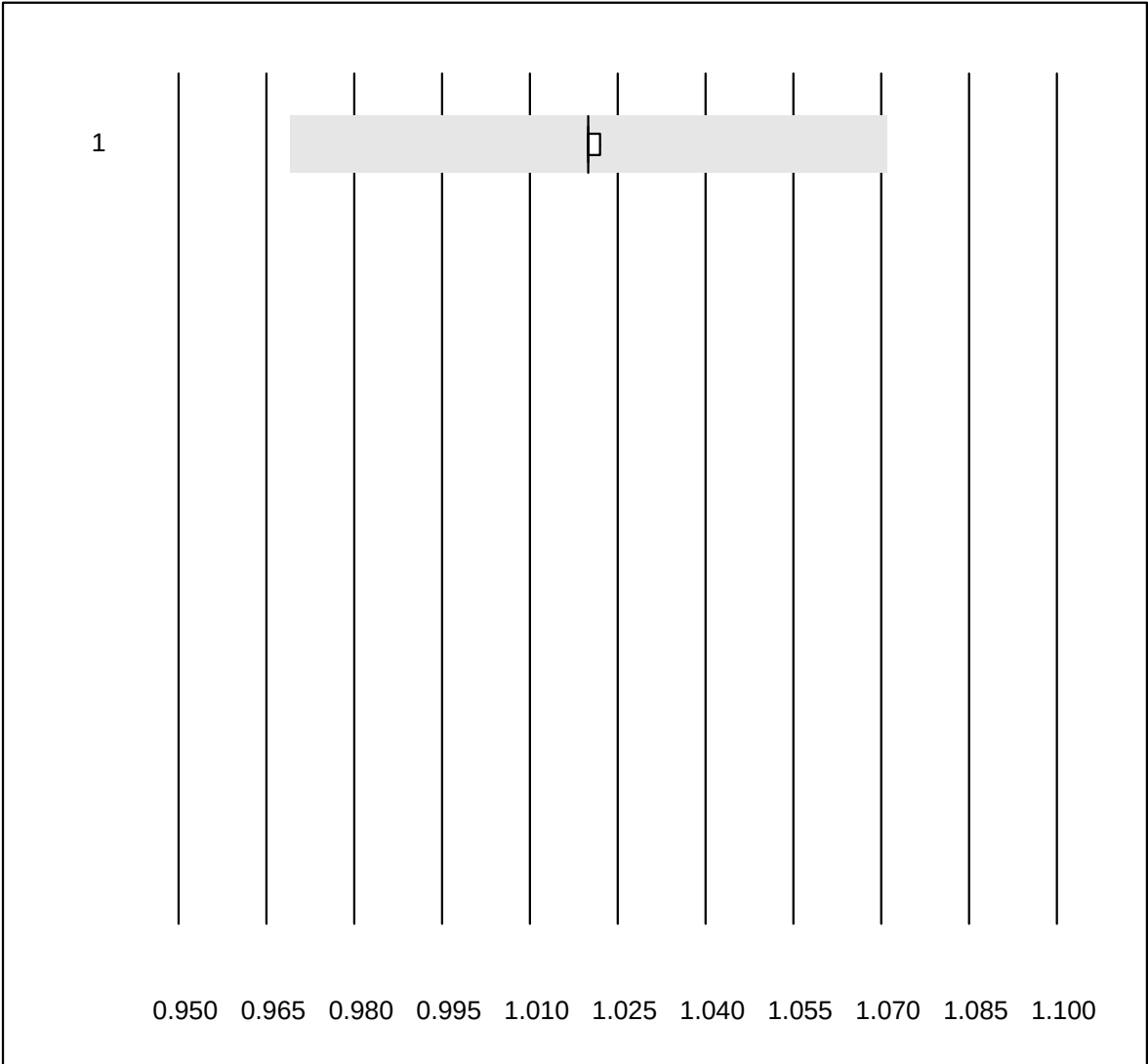


Tolleranza MQ : 5 %

Peso Specifico-urine ()

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Refrattometro	5	100.0	0.0	0.0	1.020	0.1	e

Microalbumina

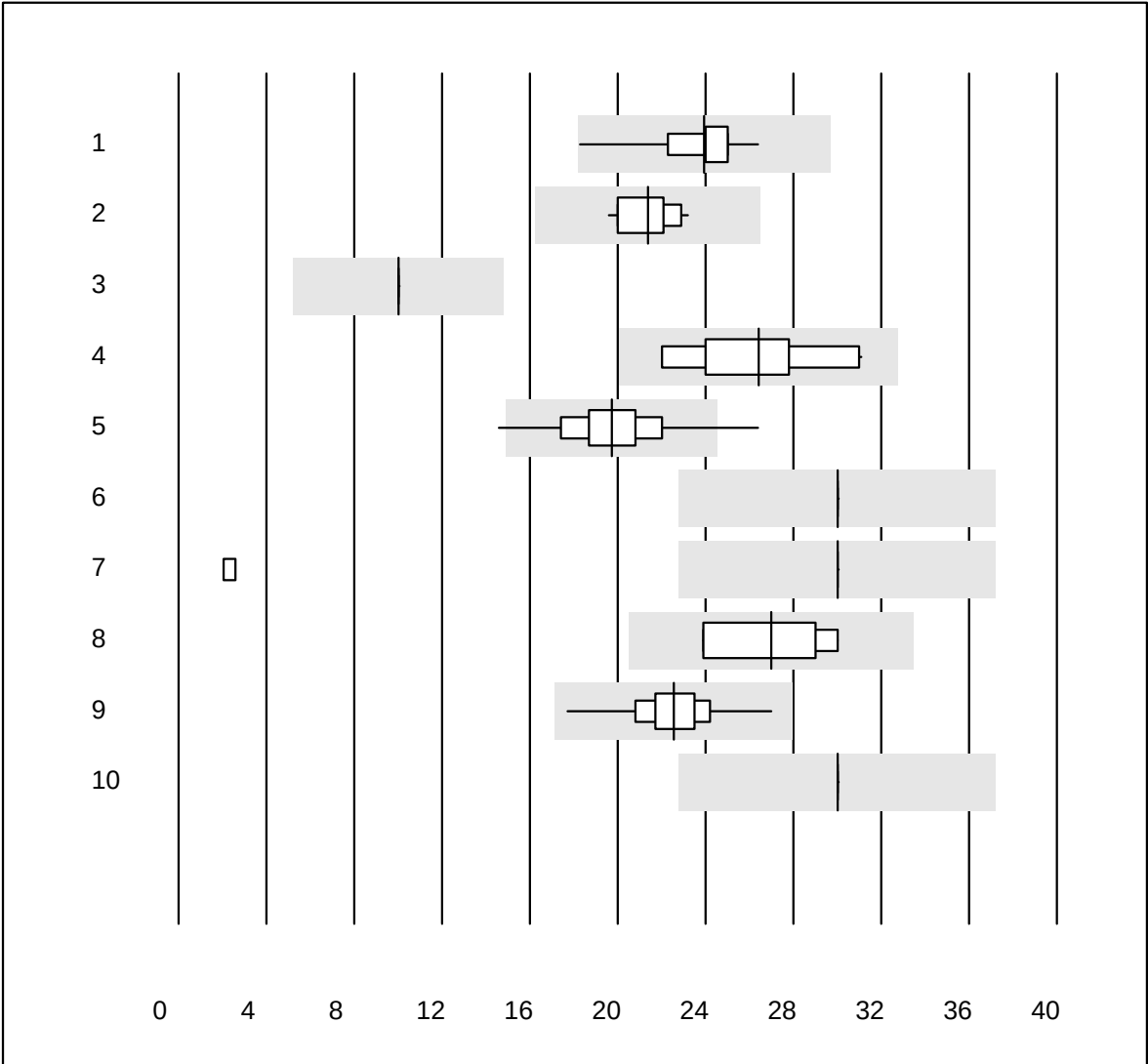


QUALAB Tolleranza : 24 %
(< 20.0: +/- 4.8 mg/l)

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Abbott	11	100.0	0.0	0.0	23.9	8.9	e
2	Roche	23	100.0	0.0	0.0	21.4	5.2	e
3	Aution	12	91.7	0.0	8.3	10.0	0.0	e
4	AFIAS	18	94.4	0.0	5.6	26.4	10.4	e
5	Afinion	525	96.7	0.8	2.5	19.7	8.8	e
6	Sysmex U	18	72.2	0.0	27.8	30.0	0.0	e
7	altri metodi	6	16.7	0.0	83.3	30.0	0.0	a
8	Turbidimetria	4	100.0	0.0	0.0	27.0	11.0	e*
9	DCA2000/Vantage	155	95.5	0.0	4.5	22.6	7.0	e
10	Siemens Clinitek	22	77.3	0.0	22.7	30.0	0.0	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Creatinina urina

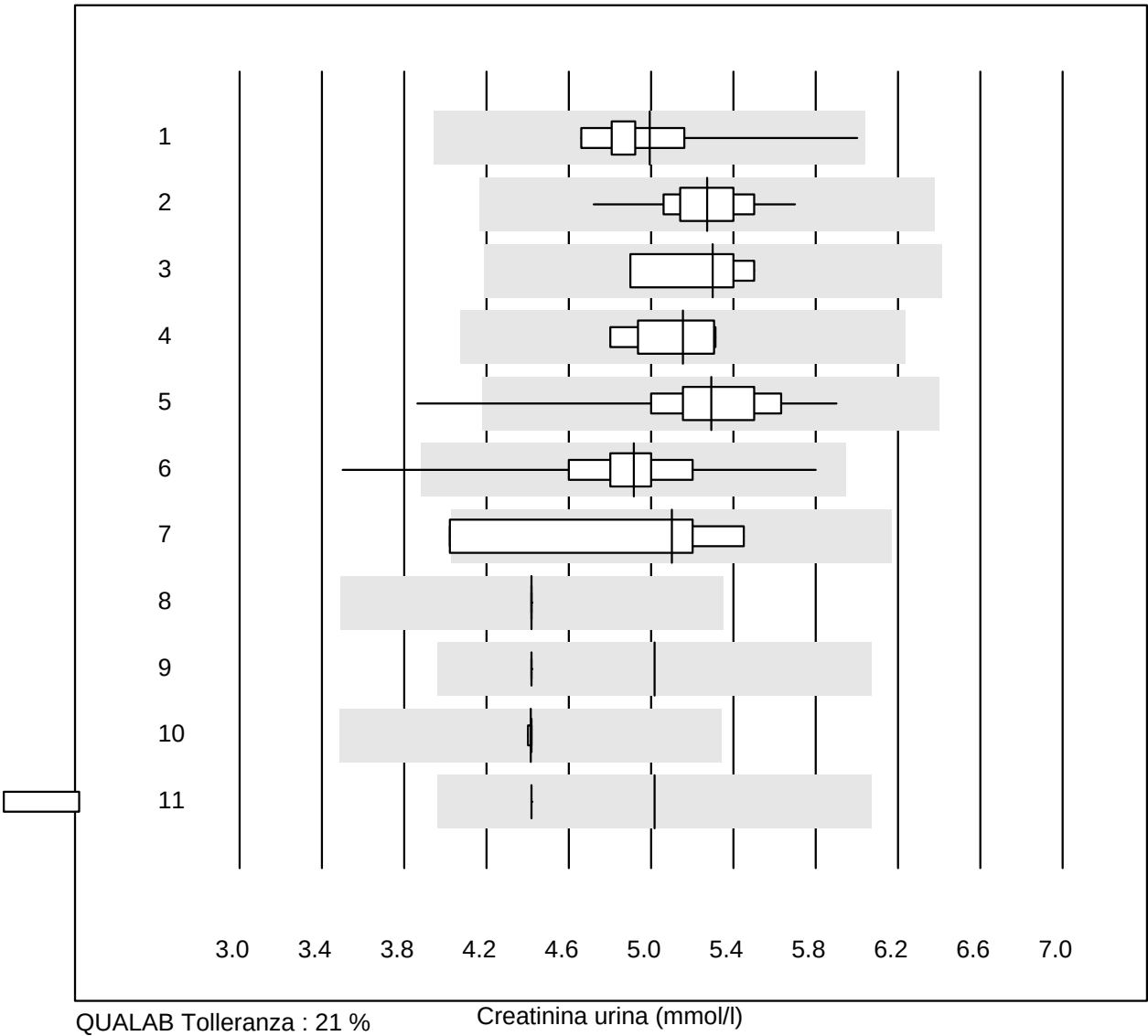


QUALAB Tolleranza : 21 %

Creatinina urina (mmol/l)

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	5.0	7.5	e
2 Roche	29	100.0	0.0	0.0	5.3	3.7	e
3 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	5.3	5.0	e
4 Siemens	6	83.3	0.0	16.7	5.2	4.5	e
5 DCA2000/Vantage	155	92.2	1.3	6.5	5.3	6.1	e
6 Afinion	522	98.5	0.4	1.1	4.9	4.8	e
7 Chimica umida	4	75.0	25.0	0.0	5.1	12.7	e*
8 Sysmex U	15	80.0	0.0	20.0	4.4	0.0	e
9 Aution	12	41.7	0.0	58.3	5.0	0.0	a
10 Siemens Clinitek	21	52.4	0.0	47.6	4.4	0.2	e
11 altri metodi	7	14.3	0.0	85.7	5.0	0.0	a


3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppe)

Eritrociti

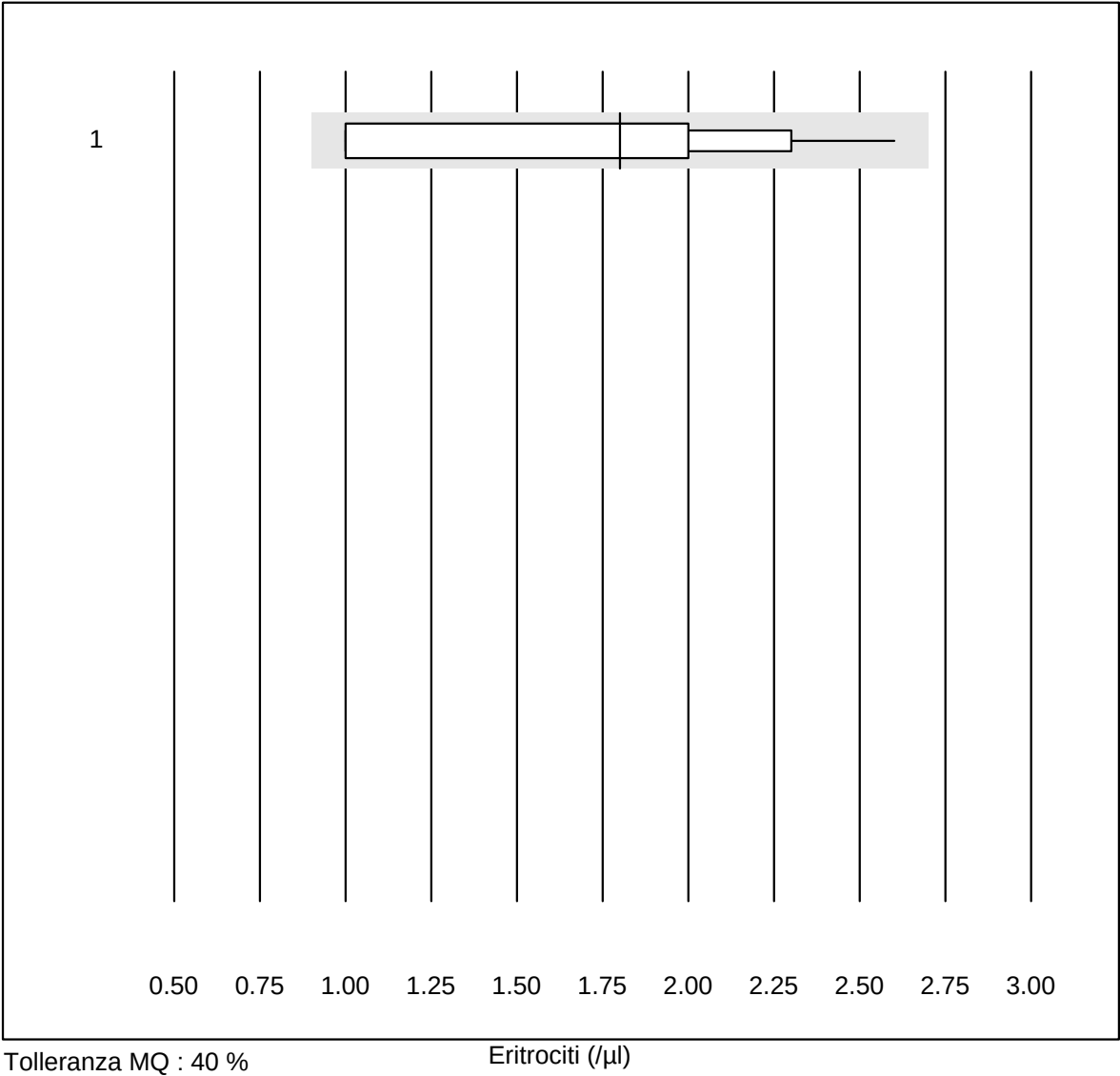


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	15	93.3	0.0	6.7	2	35.6	a

Leucociti

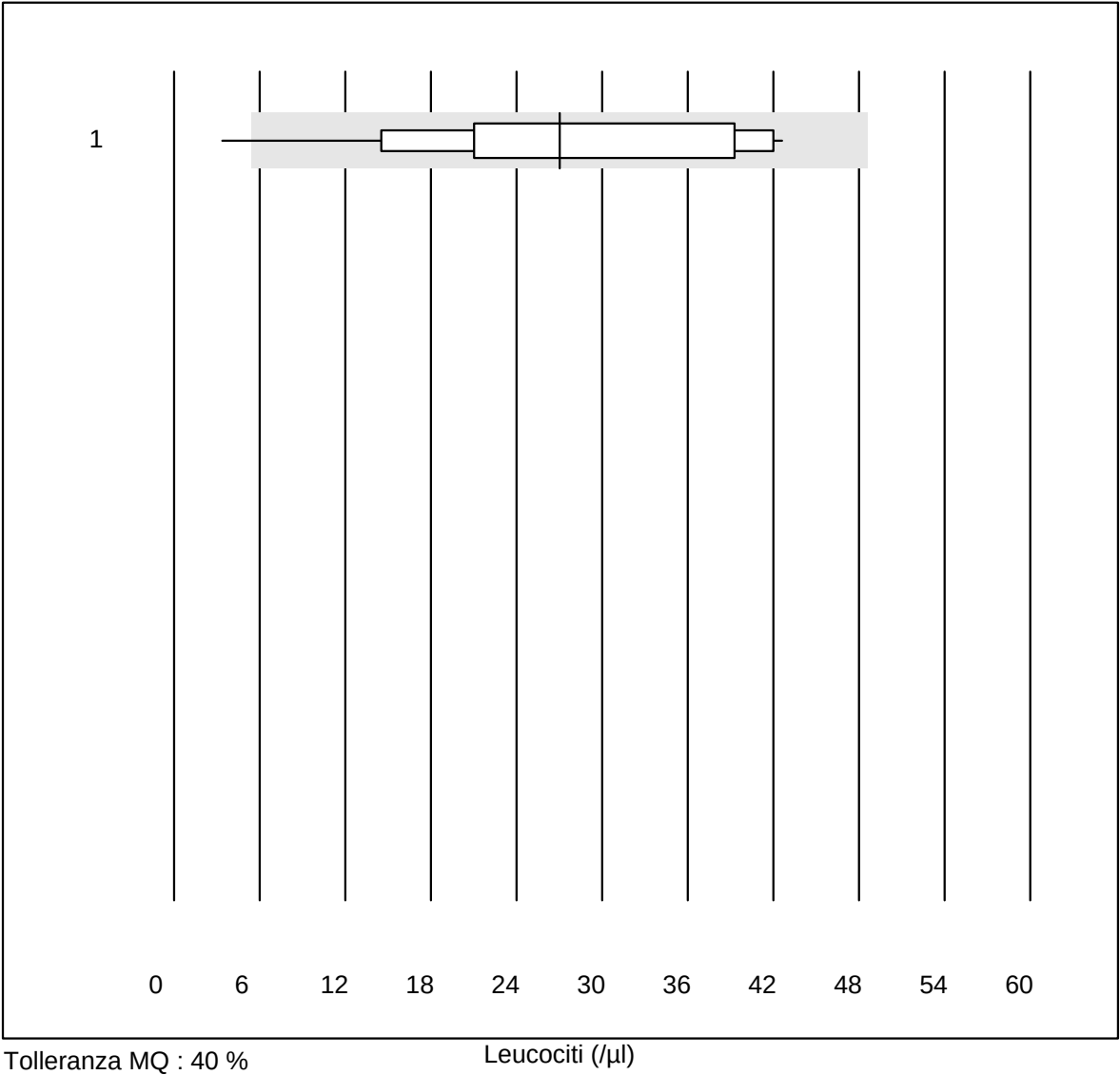


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	15	93.3	6.7	0.0	27	36.8	a

Epiteli

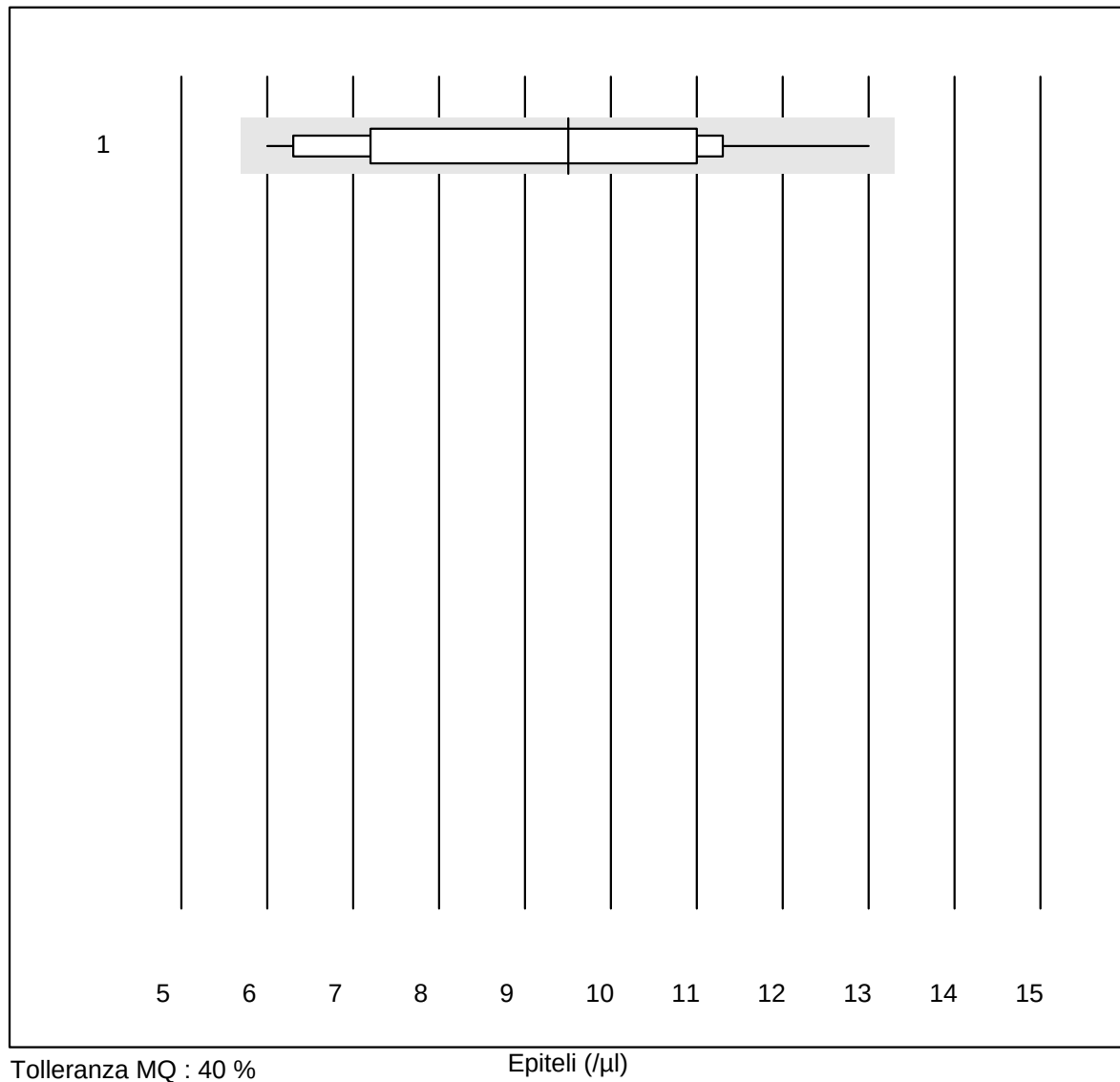


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	15	73.3	0.0	26.7	10	25.5	a

Lievito

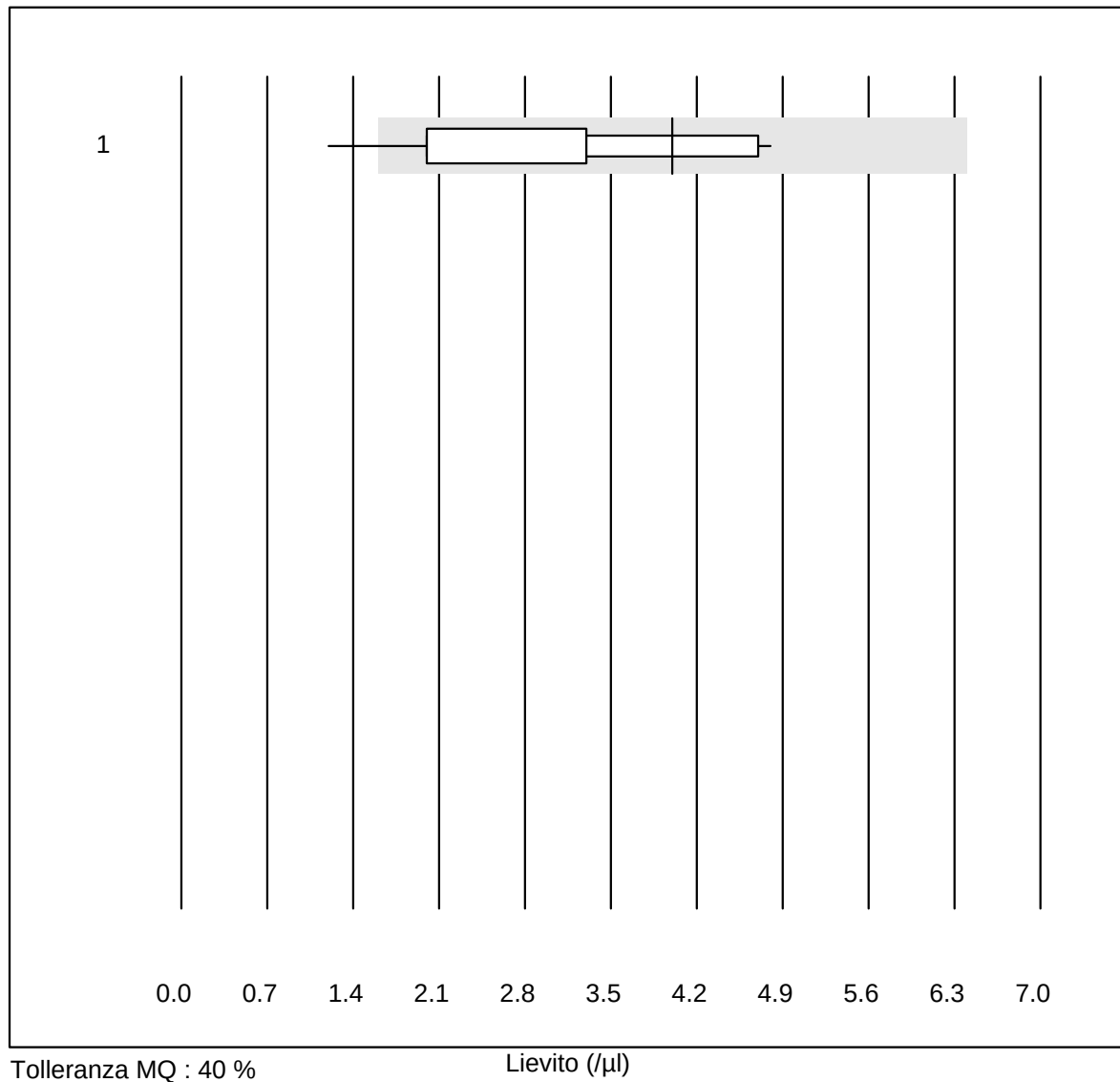

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	14	78.6	7.1	14.3	4	37.8	a

Batteri

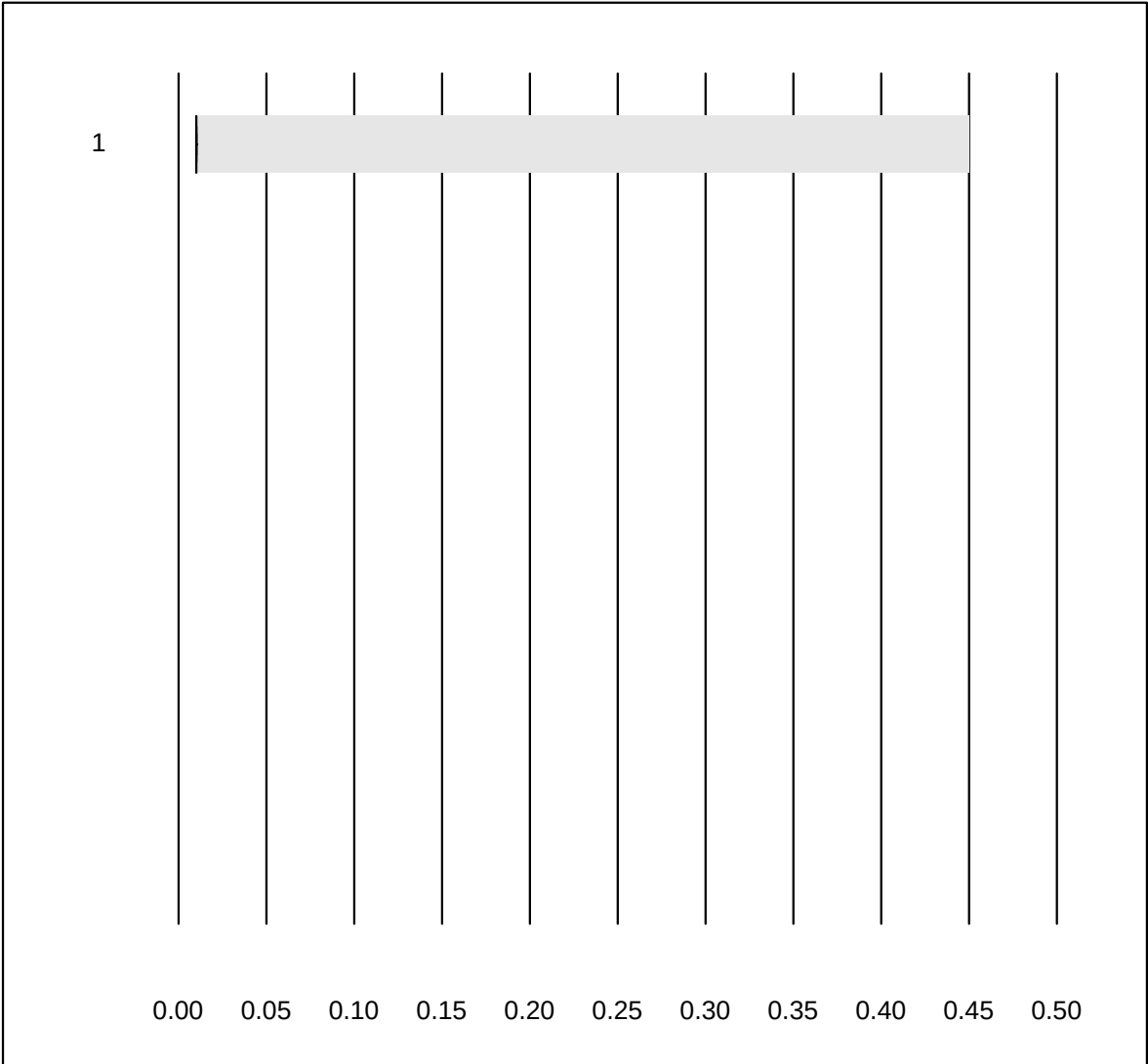


Tolleranza MQ : 40 %

Batteri (/µl)


No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	14	100.0	0.0	0.0	0	0.0	a

Cristalli

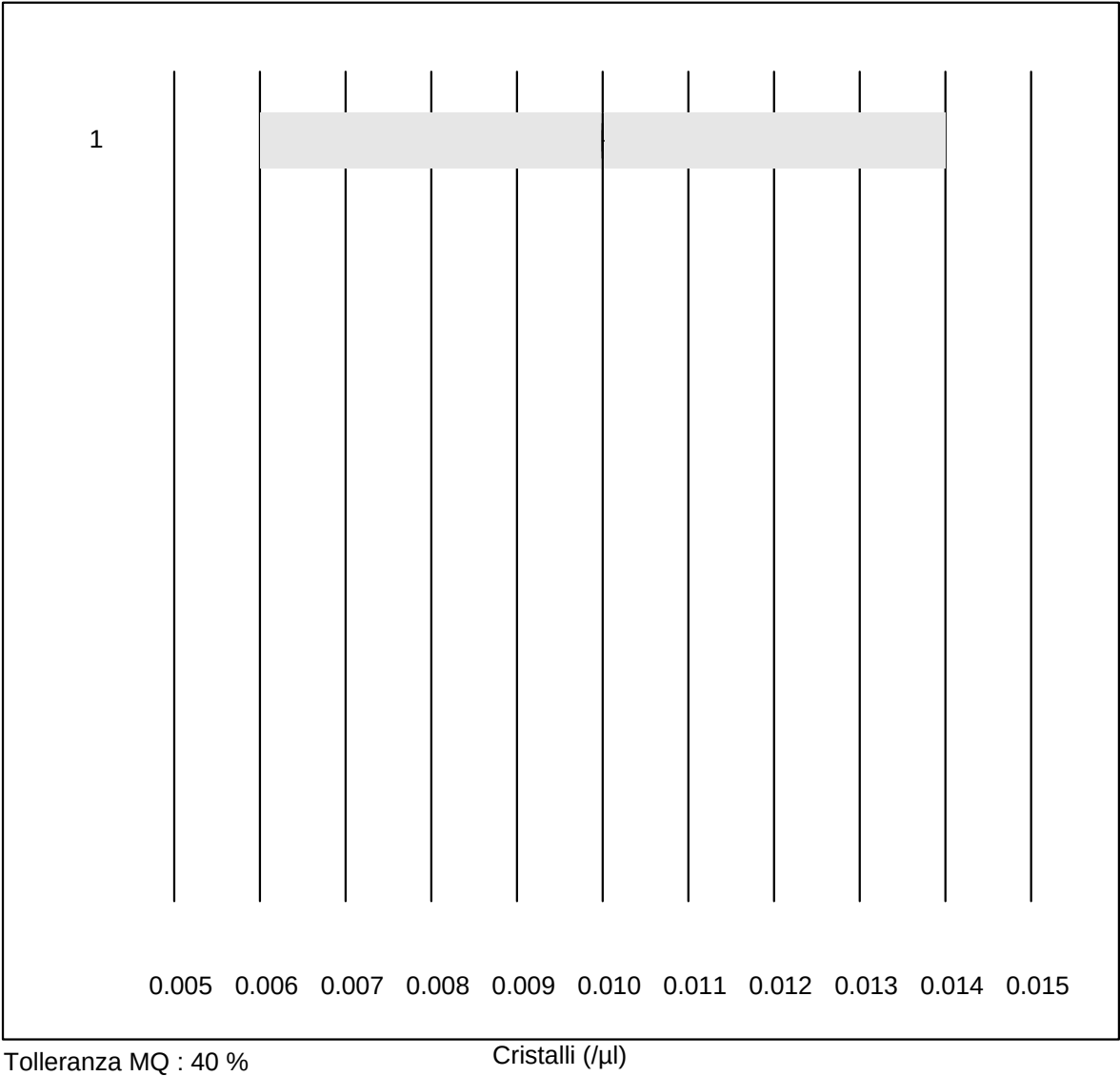

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	14	92.9	0.0	7.1	0	0.0	e


CMV NAT qn

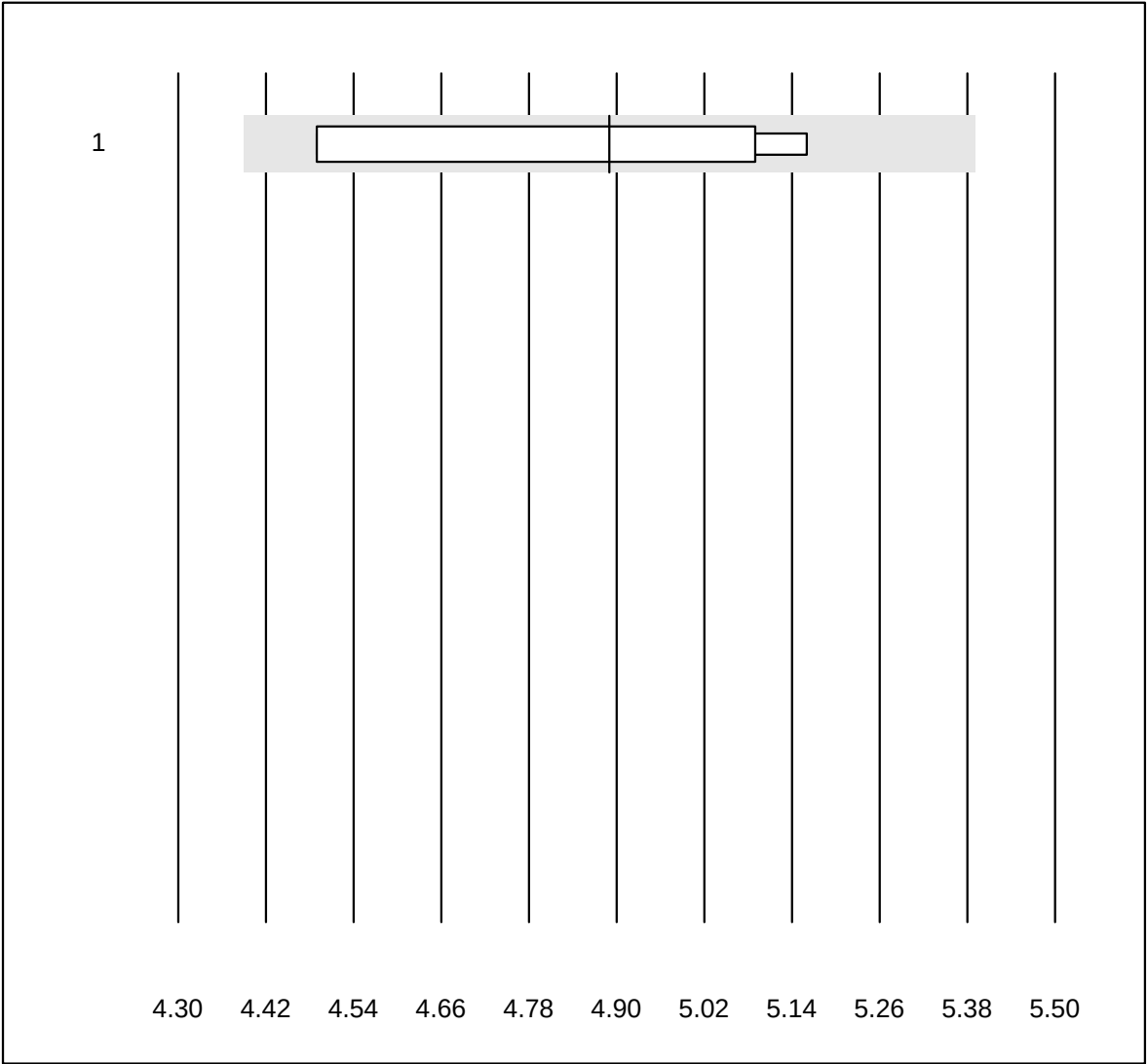

QUALAB Tolleranza : +/- 0.50 Log10 IU/m

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	4.89	6.6	e*

EBV NAT qn

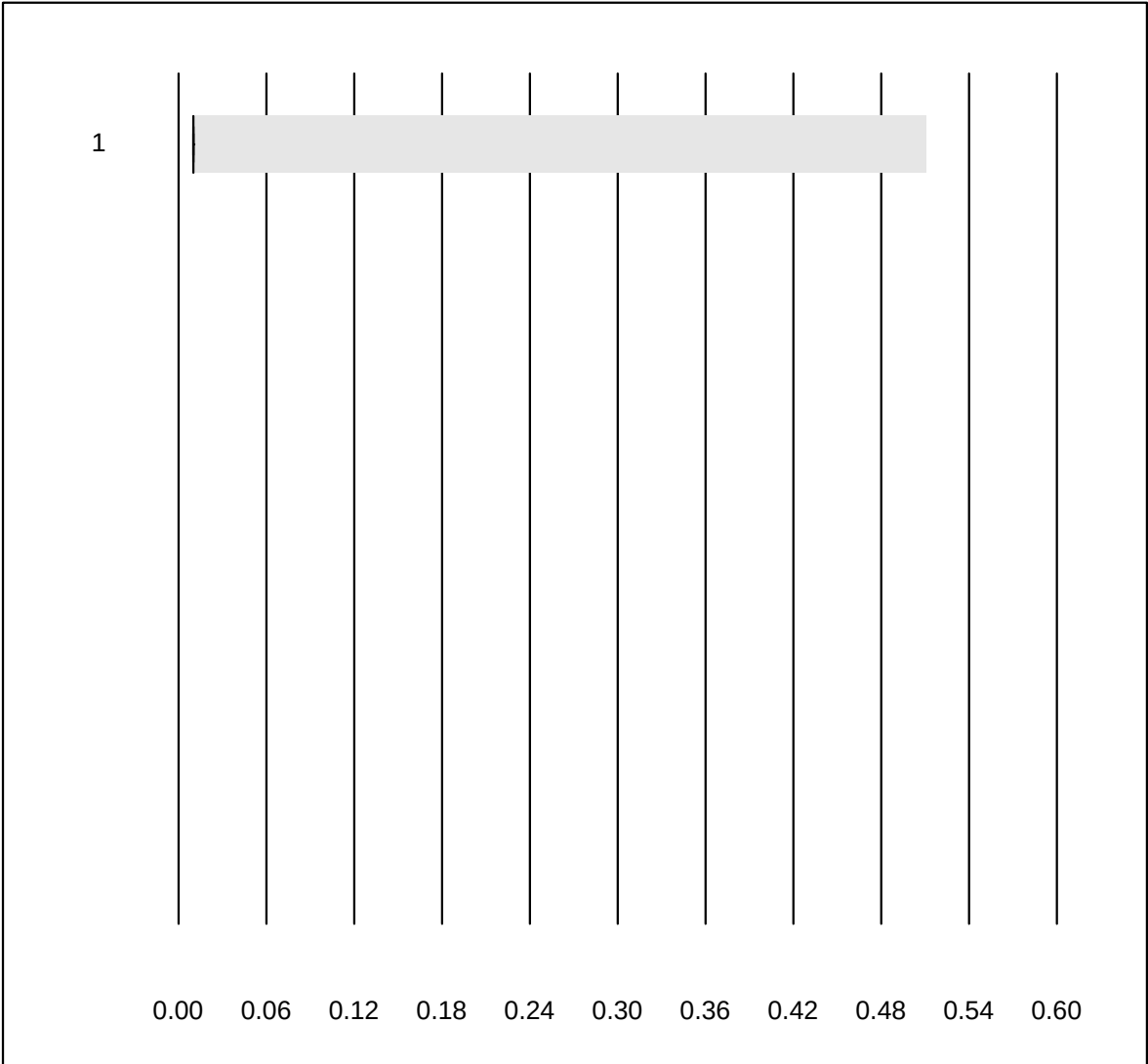


EBV NAT qn (Log10 IU/m)

QUALAB Tolleranza : +/- 0.50 Log10 IU/m

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	0.01	0.0	e

HBV NAT qn

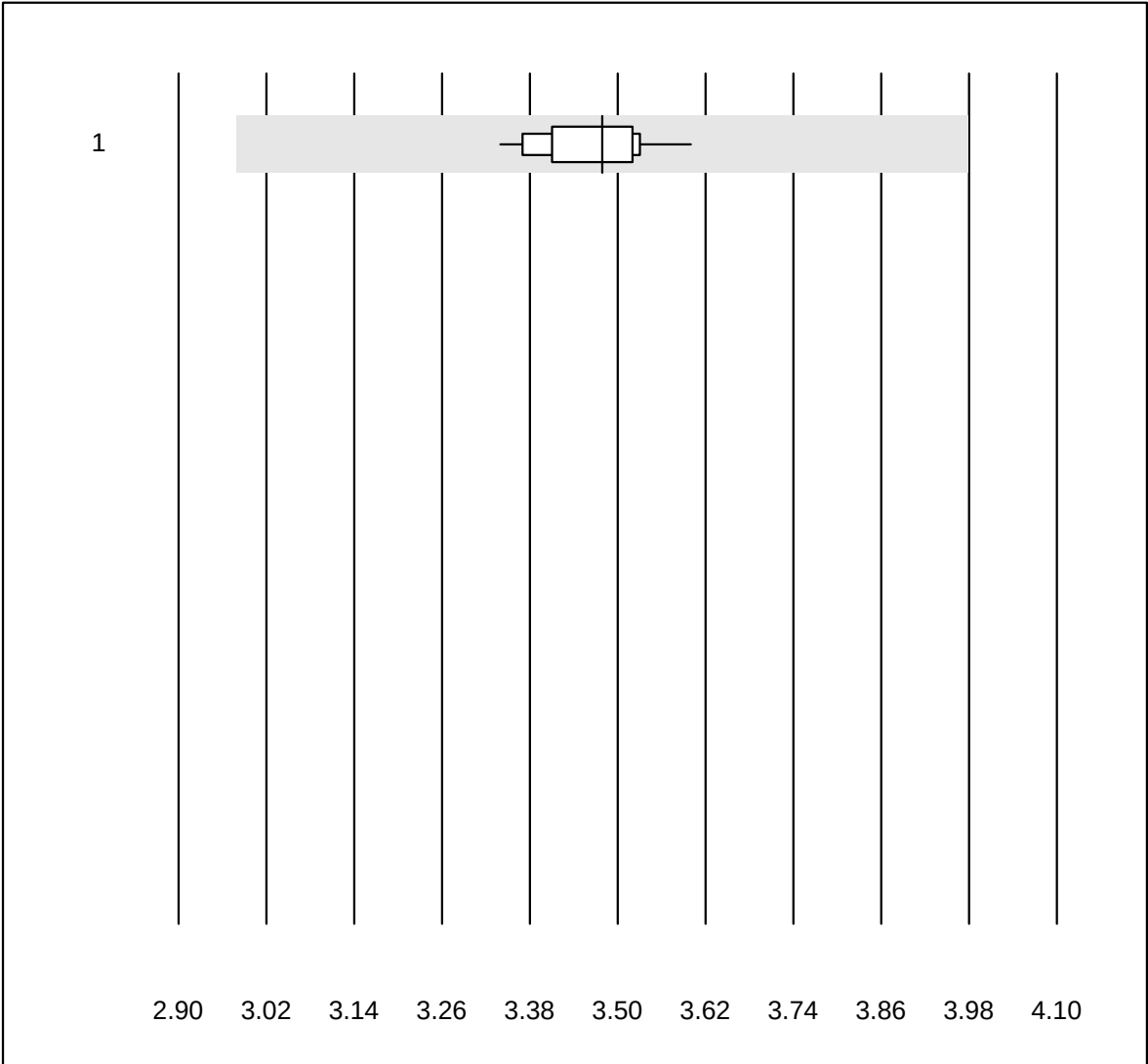


HBV NAT qn (Log10 IU/m)

QUALAB Tolleranza : +/- 0.50 Log10 IU/m

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	3.48	2.2	e*


HCV NAT qn

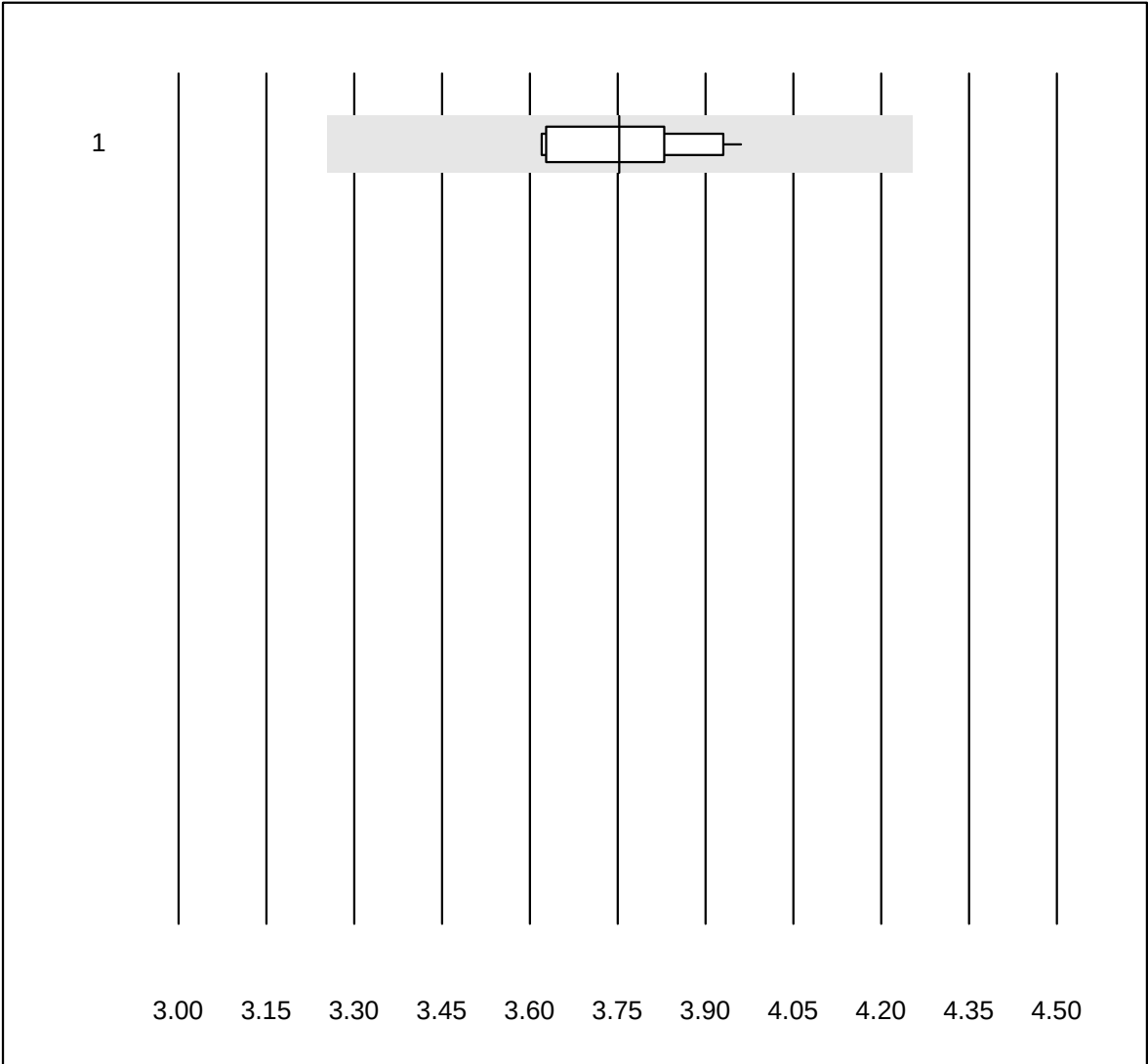

HCV NAT qn (Log10 IU/m)

QUALAB Tolleranza : +/- 0.50 Log10 IU/m

No. Metodo		Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1	Tutti i metodi	12	100.0	0.0	0.0	3.75	3.2	e*

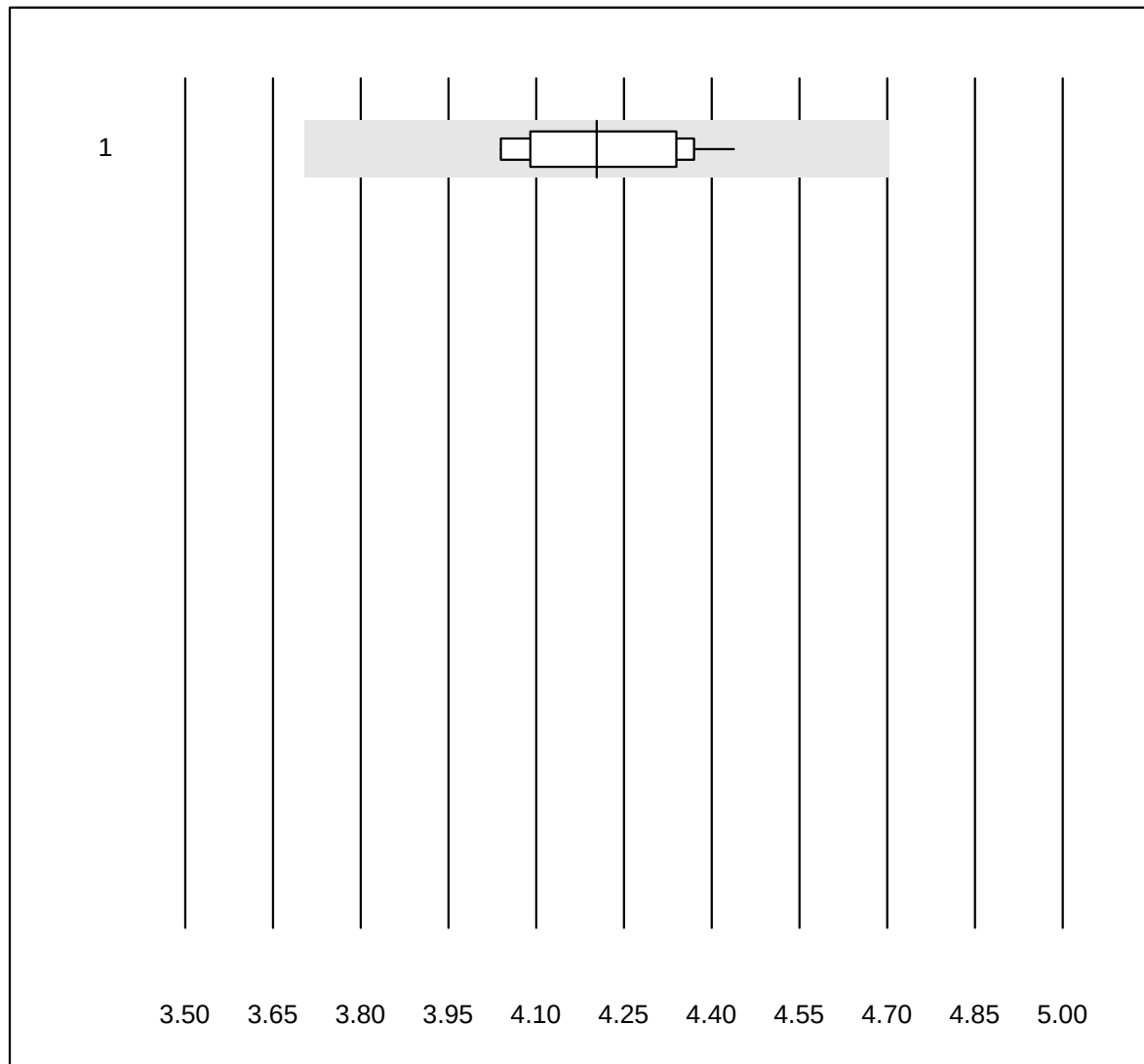HIV1 NAT qn

HIV1 NAT qn (Log10 cp/m)

QUALAB Tolleranza : +/- 0.50 Log10 cp/m

No. Metodo	Total	% OK	% insuff.	% outlier	Giusto	CV%	Tipo
1 Tutti i metodi	10	100.0	0.0	0.0	4.20	3.5	e*