

Rapporto del controllo circolare 2026-3

Campioni

Prima e durante la spedizione sono state controllate l'omogeneità e la stabilità di tutti i campioni e non sono state riscontrate irregolarità. I test sono stati condotti nei laboratori dell'ospedale universitario di Zurigo (<http://www.uzl.usz.ch/>). I seguenti campioni sono stati prodotti appositamente per MQ in subappalto: B2 Uricult, H4 Ematologia parassitaria, K14 Marker tumorale.

Determinazione dei valori assegnati

Per ogni valore assegnato è indicato il tipo di procedura secondo ISO17043:2010, B2.1 (colonna "tipo"):

- a Valori noti, derivati dalla formulazione del materiale
- b Valori di riferimento certificati per campioni particolari
- c Valori di riferimento, determinati da analisi
- d Valori di consenso da laboratori partecipanti esperti
- e Valori di consenso dai partecipanti

In gruppi con più di 9 partecipanti i valori assegnati vengono in genere determinati con il valore di consenso ("e"). Per la determinazione del valore bersaglio viene utilizzato il valore medio del collettivo di quel metodo. I valori con una deviazione rispetto al valore teorico superiore a 1.5 volte la tolleranza Qualab vengono considerati outlier ed eliminati dal calcolo del valore bersaglio. Come valore di partenza per l'eliminazione degli outlier si utilizzano i risultati degli esami di idoneità.

Per garantire a tutti i partecipanti valori assegnati rappresentativi, in gruppi più piccoli possono essere adottate anche altre procedure.

Incertezza dei valori assegnati

L'incertezza standard (u_x) viene calcolata con la seguente formula (ISO13528):

$u_x = (\text{valore assegnato}/100) * 1.25 / \text{radice quadrata del numero di partecipanti} * \text{coeff. variazione (CV)\%}$

- u_x ha la stessa unità di misura del valore assegnato
- u_x è paragonabile alla deviazione standard (SD) del collettivo dei partecipanti (SD: $\text{valore assegnato} * \text{CV\%}/100$)
- Se il numero dei partecipanti è superiore a 18, l'incertezza standard è molto inferiore alla variabilità del collettivo e può essere ignorata


Tolleranze QUALAB e MQ

Per le analisi obbligatorie vengono utilizzate le tolleranze Qualab (www.qualab.ch, externe Qualitätskontrolle). Per le analisi non obbligatorie le tolleranze vengono definite dal direttore dei controlli circolari MQ.

Se l'incertezza calcolata u_x del valore assegnato è superiore al 15% della tolleranza QUALAB o MQ, appare un asterisco accanto alla lettera che descrive la procedura di calcolo del valore assegnato (per esempio "e*"), per avvisare il partecipante che l'incertezza del valore assegnato può avere un'influenza sull'esito del controllo.

Rappresentazioni grafiche

I risultati sono rappresentati graficamente come segue:

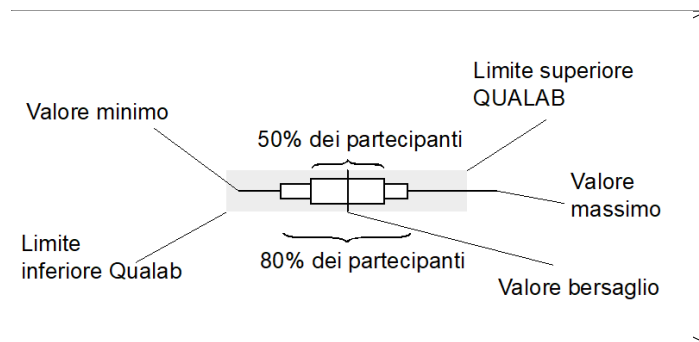

Confronto degli strumenti

I dati in questa parte del rapporto consentono di paragonare l'efficienza dei vari strumenti. Non vanno però dimenticati i seguenti dettagli:

- Il campione di controllo K1 è un siero di controllo commerciale pronto per l'uso. Nonostante il campione sia di origine umana, non si può escludere l'insorgenza di effetti di matrice. Questi dipendono dallo strumento e portano a valori assegnati differenti.
- E' stato analizzato solo un campione. Poiché la distribuzione dei risultati dipende dalla natura del campione (effetto matrice) e dal valore stesso, i coefficienti di variazione determinati (in %) non hanno una validità generale.
- Gran parte dei valori anomali deriva da errori amministrativi (unità di misura sbagliata, scambio dei risultati) o da errori di manualità (campione sbagliato, non correttamente disciolto, non abbastanza mescolato) e non ha a che fare con lo strumento.


Zurigo, 28.09.2026

R. Fried

Dr. R. Fried
Direttore controlli circolari

Non è permesso pubblicare questo rapporto o alcuna sua parte senza il permesso scritto della nostra associazione. L'originale si trova nell'archivio su www.mqzh.ch

INR AKV

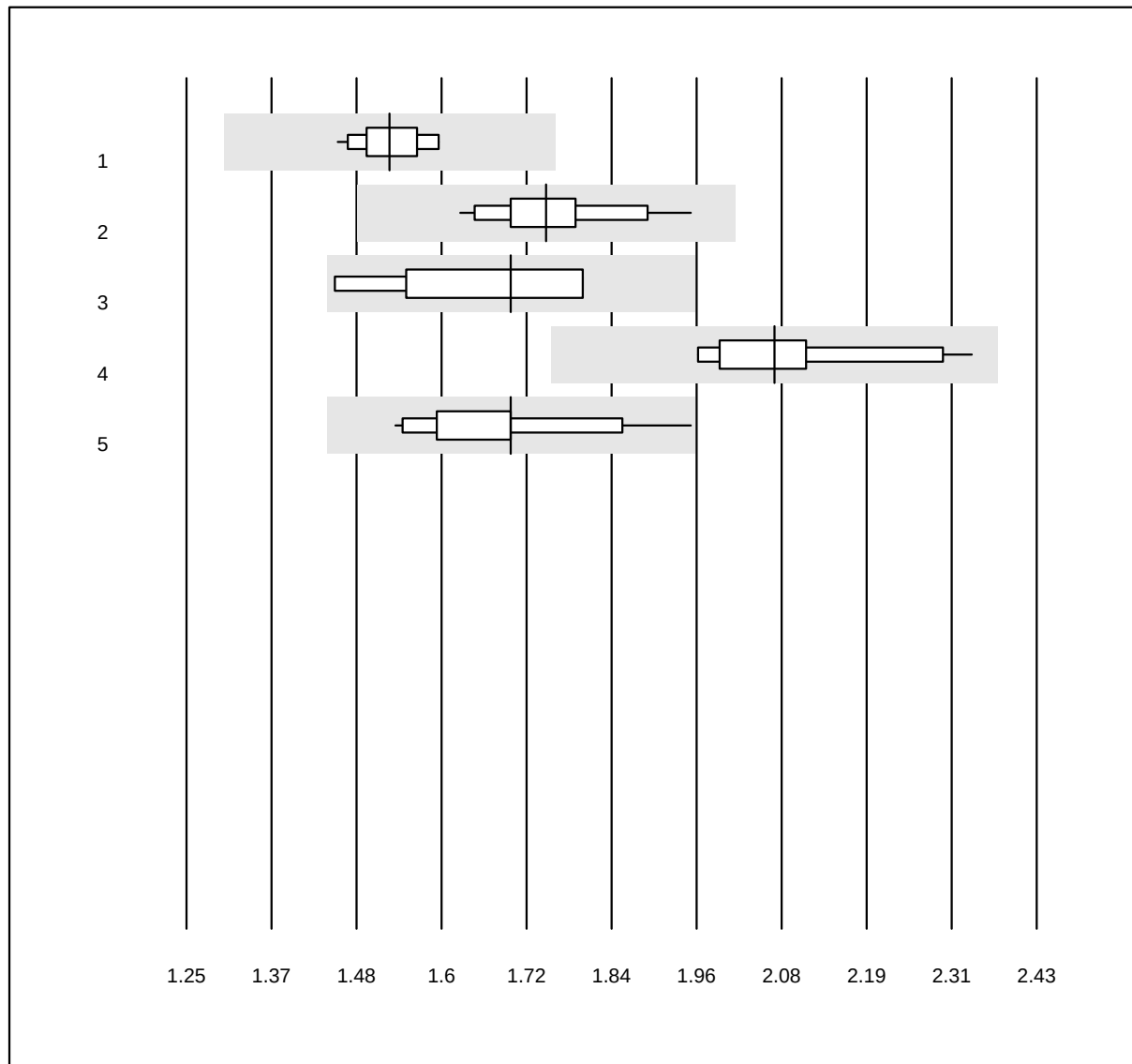


QUALAB Toleranz: 15%

INR AKV (INR)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Innovin	23	100.0	0.0	0.0	1.53	3.0	e
2 Neoplastin R	13	100.0	0.0	0.0	1.75	4.4	e
3 Neoplastin CL Plus	5	100.0	0.0	0.0	1.70	7.7	e*
4 NeoPTimal	17	100.0	0.0	0.0	2.07	5.4	e
5 Recombiplastina 2G	14	100.0	0.0	0.0	1.70	6.0	a

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

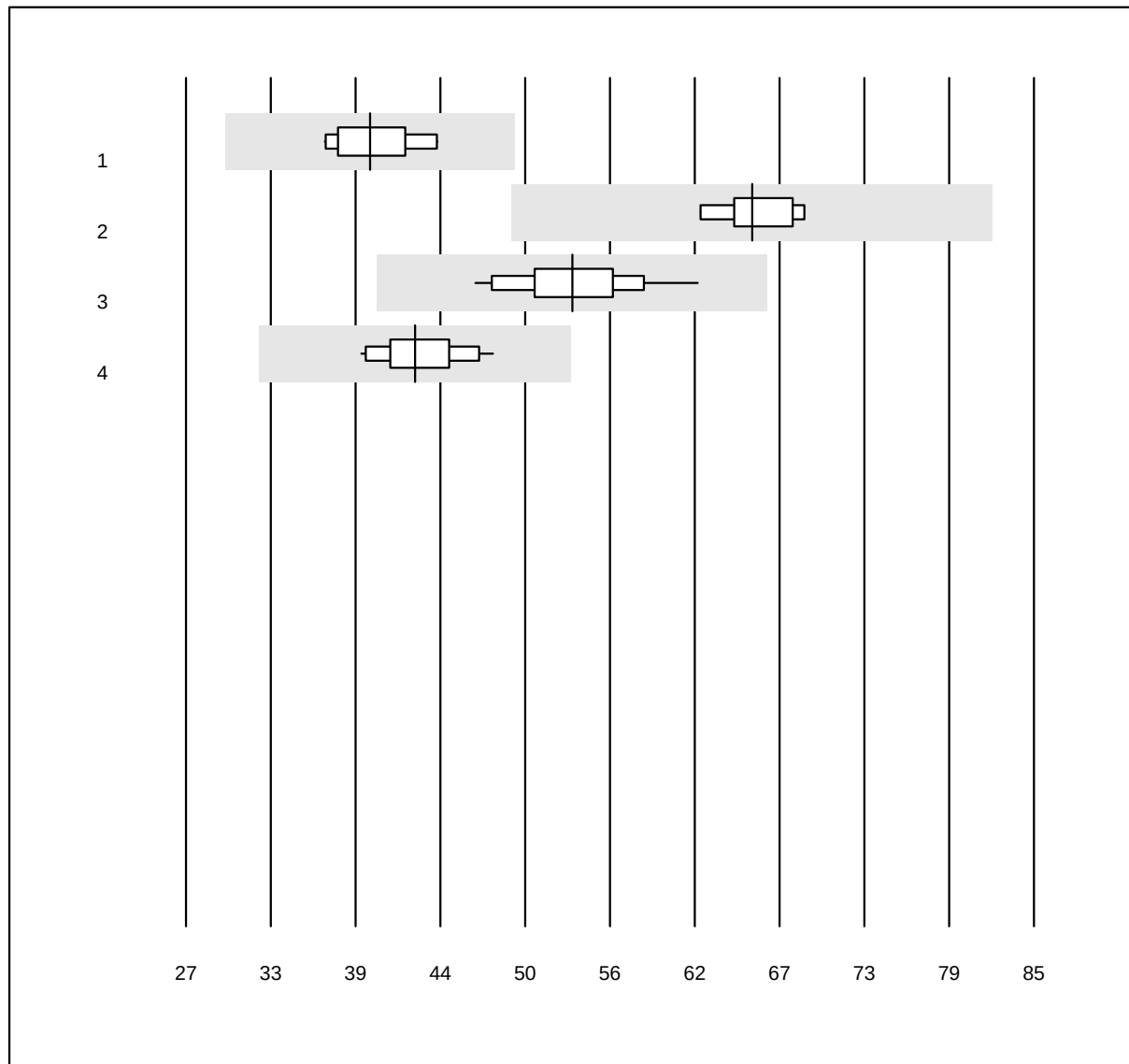
aPTT OA

QUALAB Toleranz: 25%

aPTT OA (Sek)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	39.6	7.1	e
2 Pathromtin SL	9	100.0	0.0	0.0	65.7	3.6	e
3 Stago/STA	25	100.0	0.0	0.0	53.4	6.9	e
4 aPTT-SP	14	100.0	0.0	0.0	42.7	6.0	e

Fibrinogeno OA

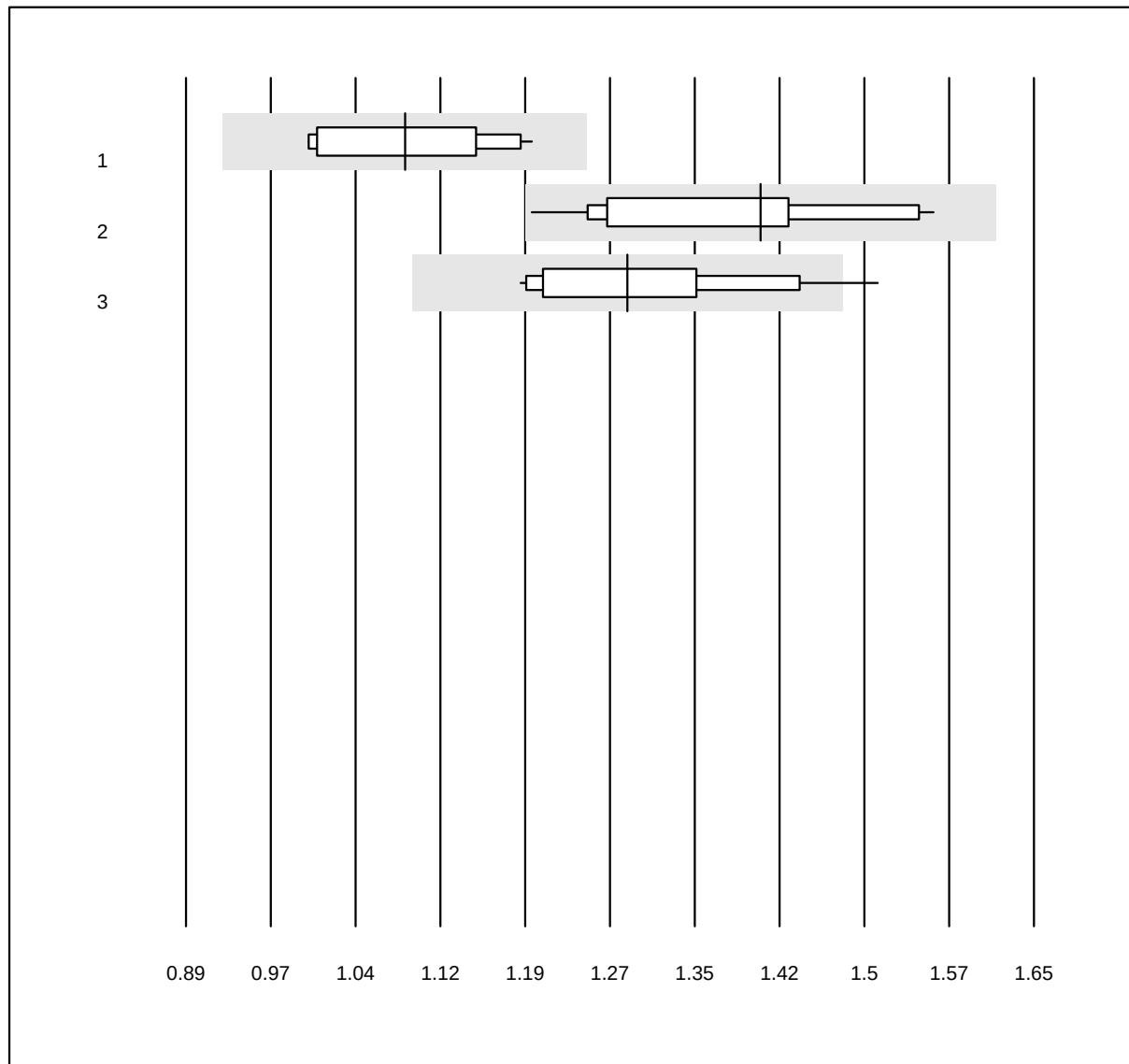


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogeno OA (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Trombina Siemens	14	100.0	0.0	0.0	1.09	6.3	e
2 Stago/STA	21	95.2	0.0	4.8	1.41	7.7	a
3 HemosIL	14	92.9	7.1	0.0	1.29	6.9	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

INR CoaguChek

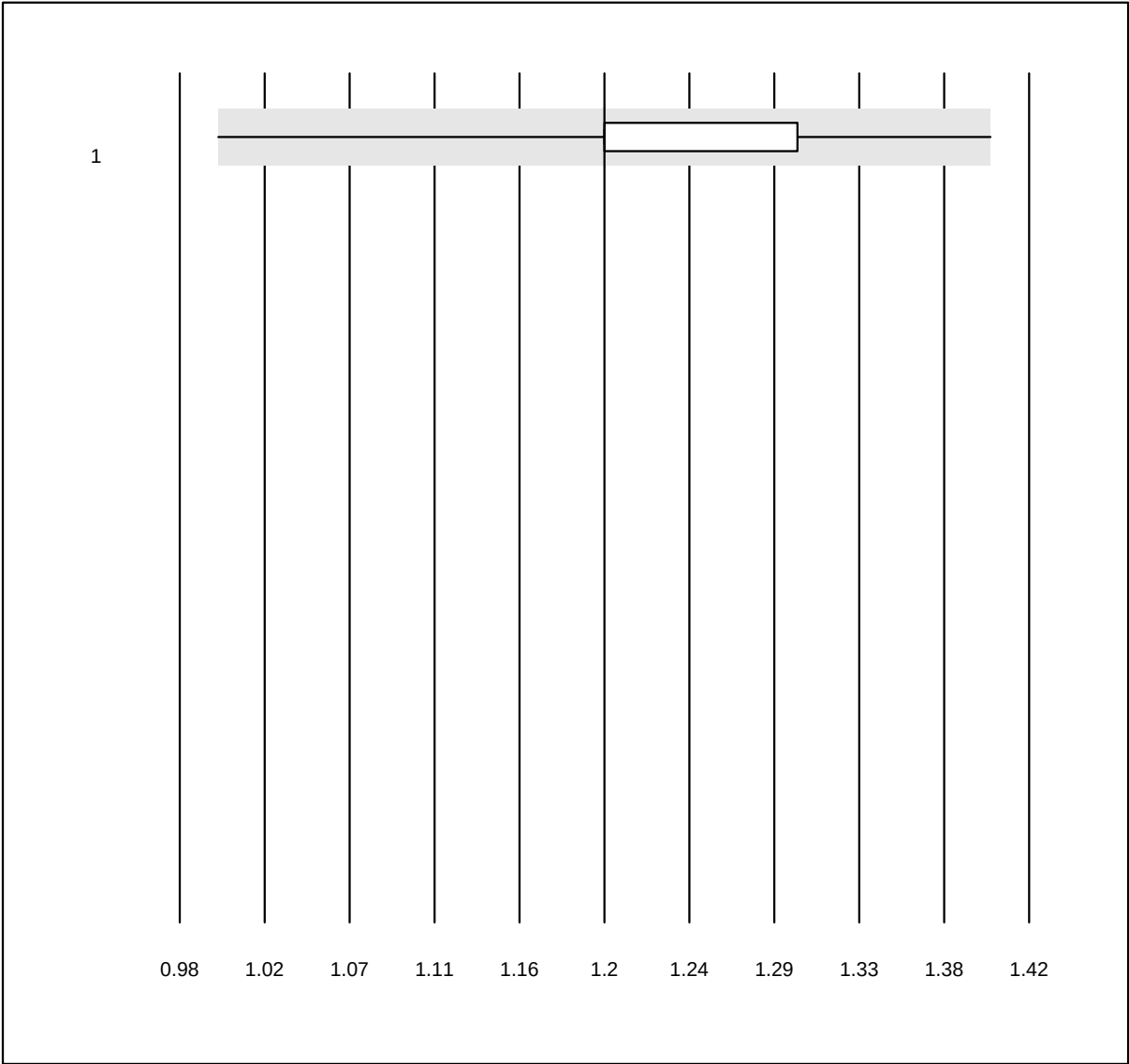


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR CoaguChek (INR)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	CoaguChek Pro II	1063	99.2	0.0	0.8	1.2	4.1	e

Quick N

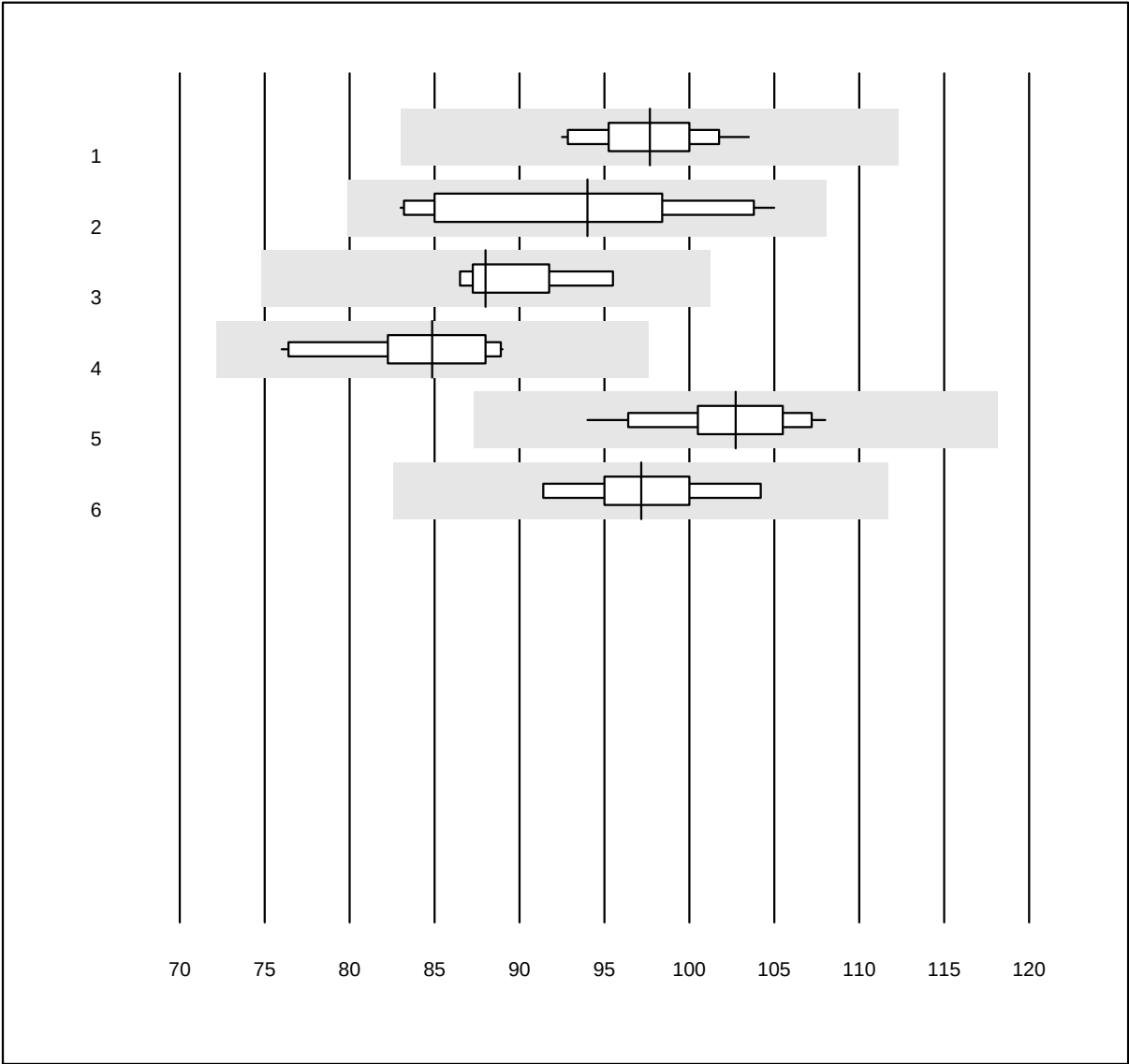


QUALAB Toleranz: 15%

Quick N (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Innovin	16	100.0	0.0	0.0	97.7	3.2	e
2 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	94.0	8.2	a*
3 Neoplastin CL Plus	4	100.0	0.0	0.0	88.0	3.0	e
4 NeoPTimal	10	100.0	0.0	0.0	84.9	5.0	e
5 Recombiplastina 2G	13	100.0	0.0	0.0	102.7	3.6	e
6 altri metodi	7	100.0	0.0	0.0	97.2	3.9	e

INR N

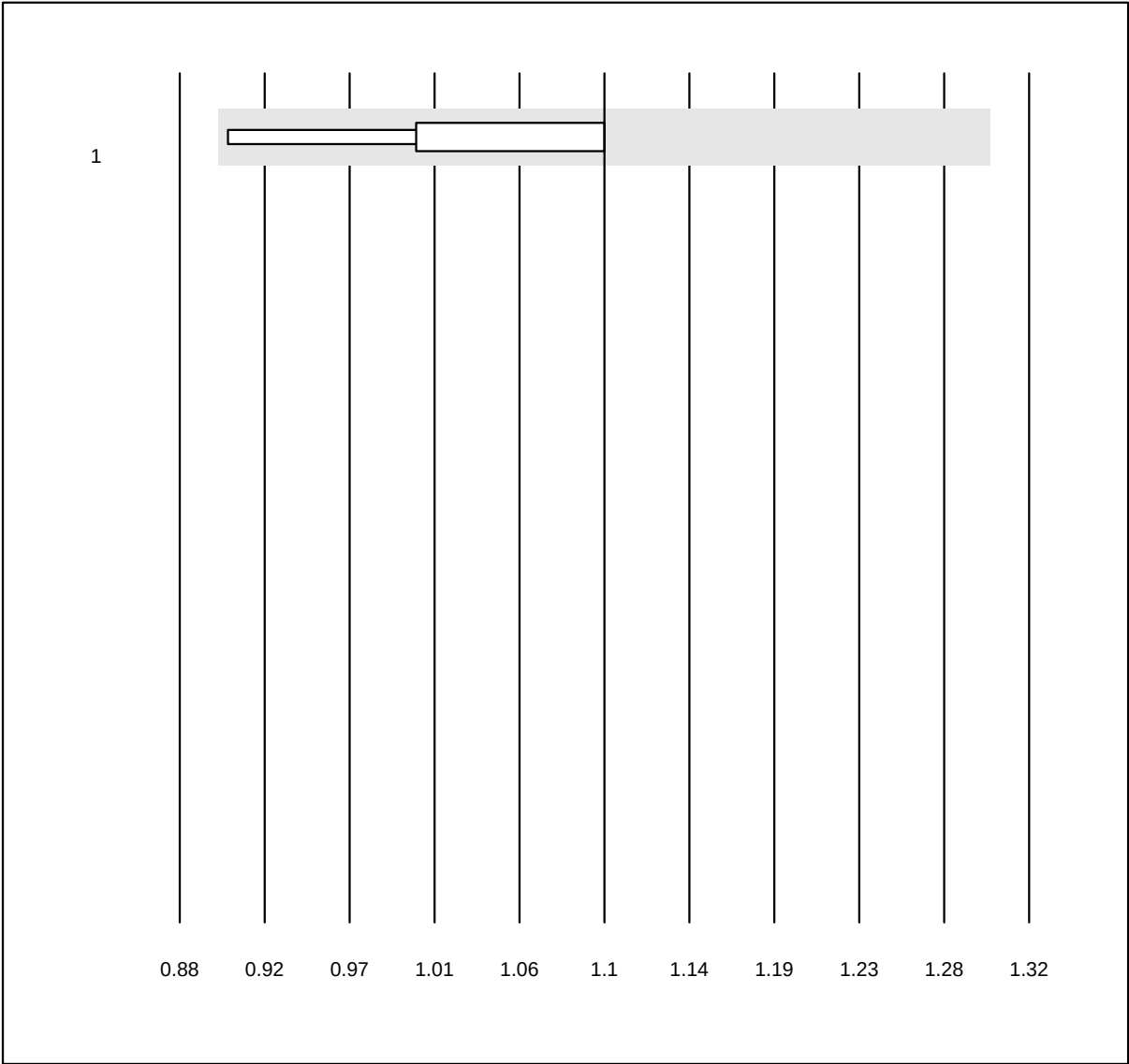


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR N (INR)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Neoplastin R	4	100.0	0.0	0.0	1.10	6.1	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

aPTT N

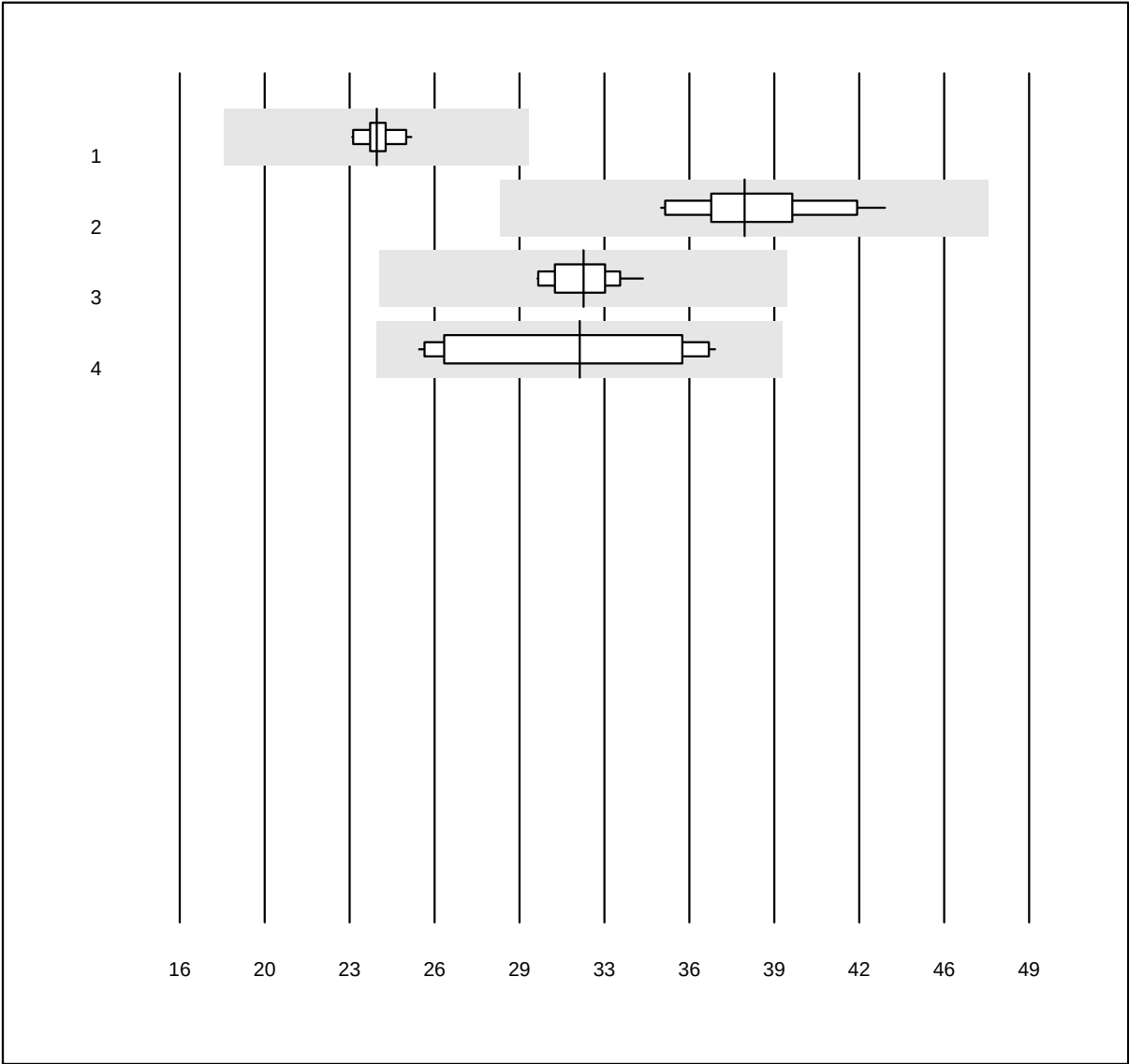


QUALAB Toleranz: 25%

aPTT N (Sek)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Actin FS	11	100.0	0.0	0.0	23.7	2.6	e
2 Pathromtin SL	13	100.0	0.0	0.0	37.9	6.3	e
3 Stago/STA	22	100.0	0.0	0.0	31.7	3.8	e
4 aPTT-SP	12	100.0	0.0	0.0	31.5	14.7	e*

Fibrinogeno N

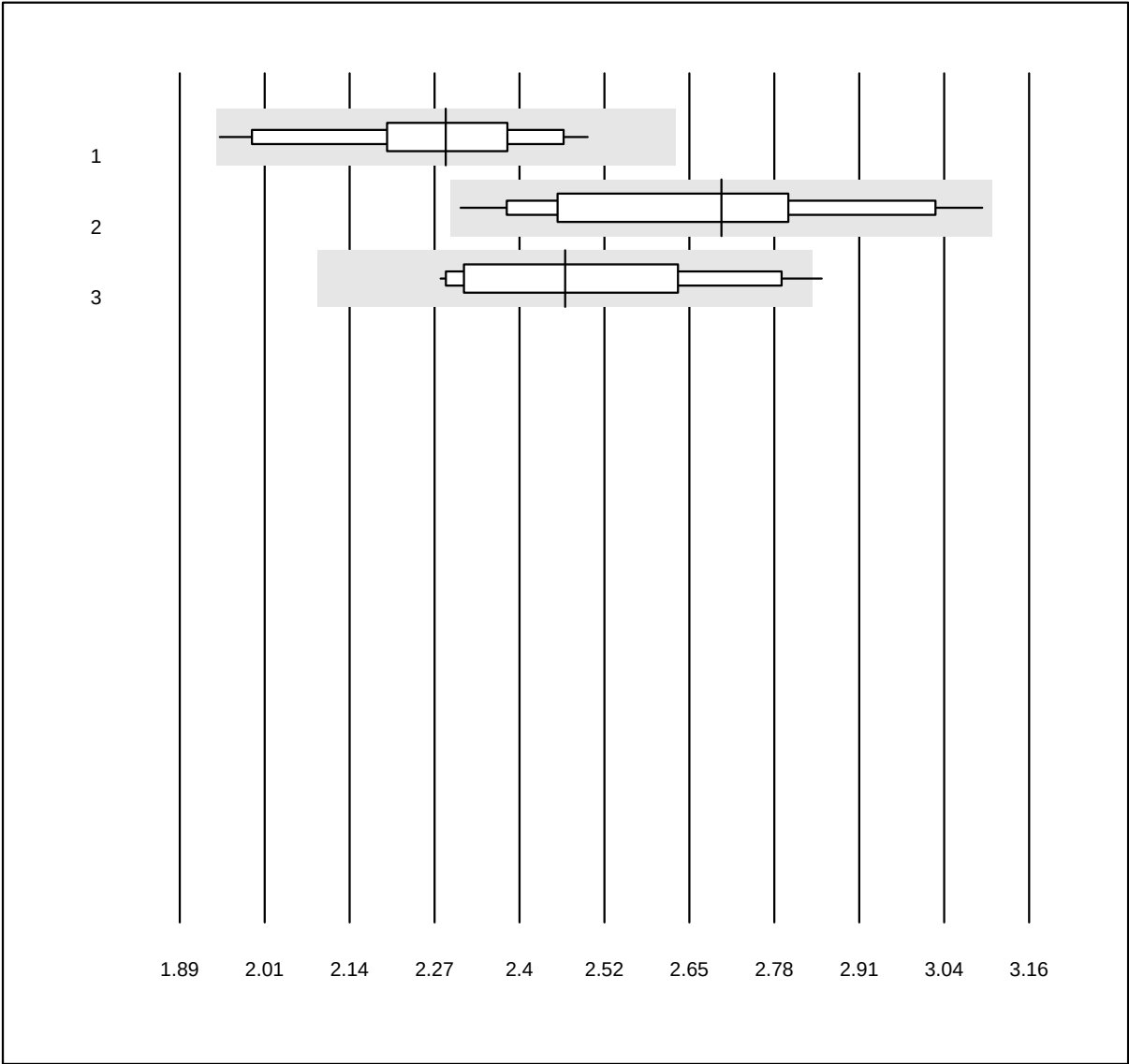


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogeno N (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Trombina Siemens	15	100.0	0.0	0.0	2.29	6.5	e
2 Stago/STA	22	100.0	0.0	0.0	2.70	8.1	a
3 ACL	13	92.3	7.7	0.0	2.47	7.3	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Fattore V

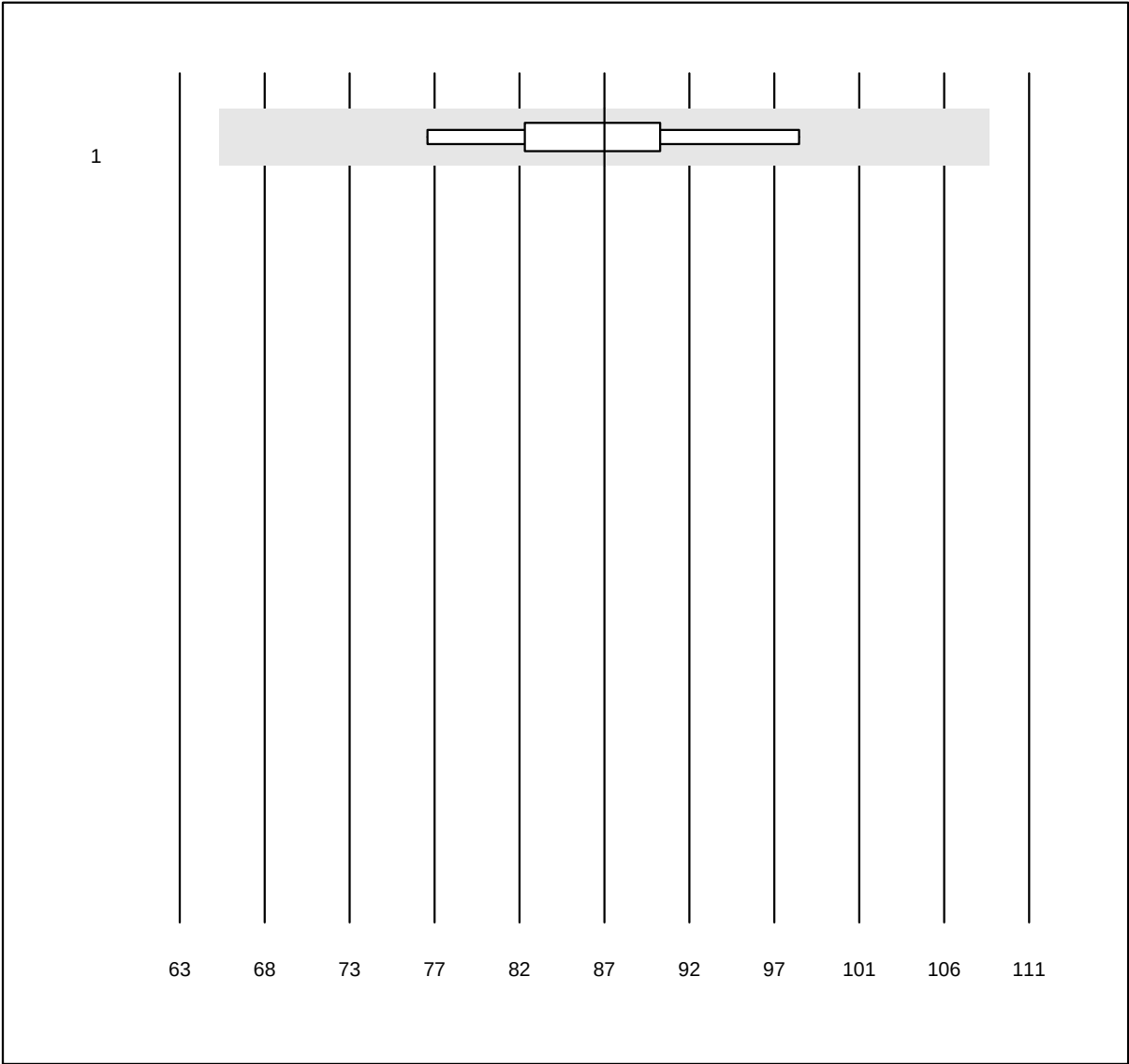


MQ Toleranz: 25%

Fattore V (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	9	100.0	0.0	0.0	87.0	7.0	e

Fattore VII

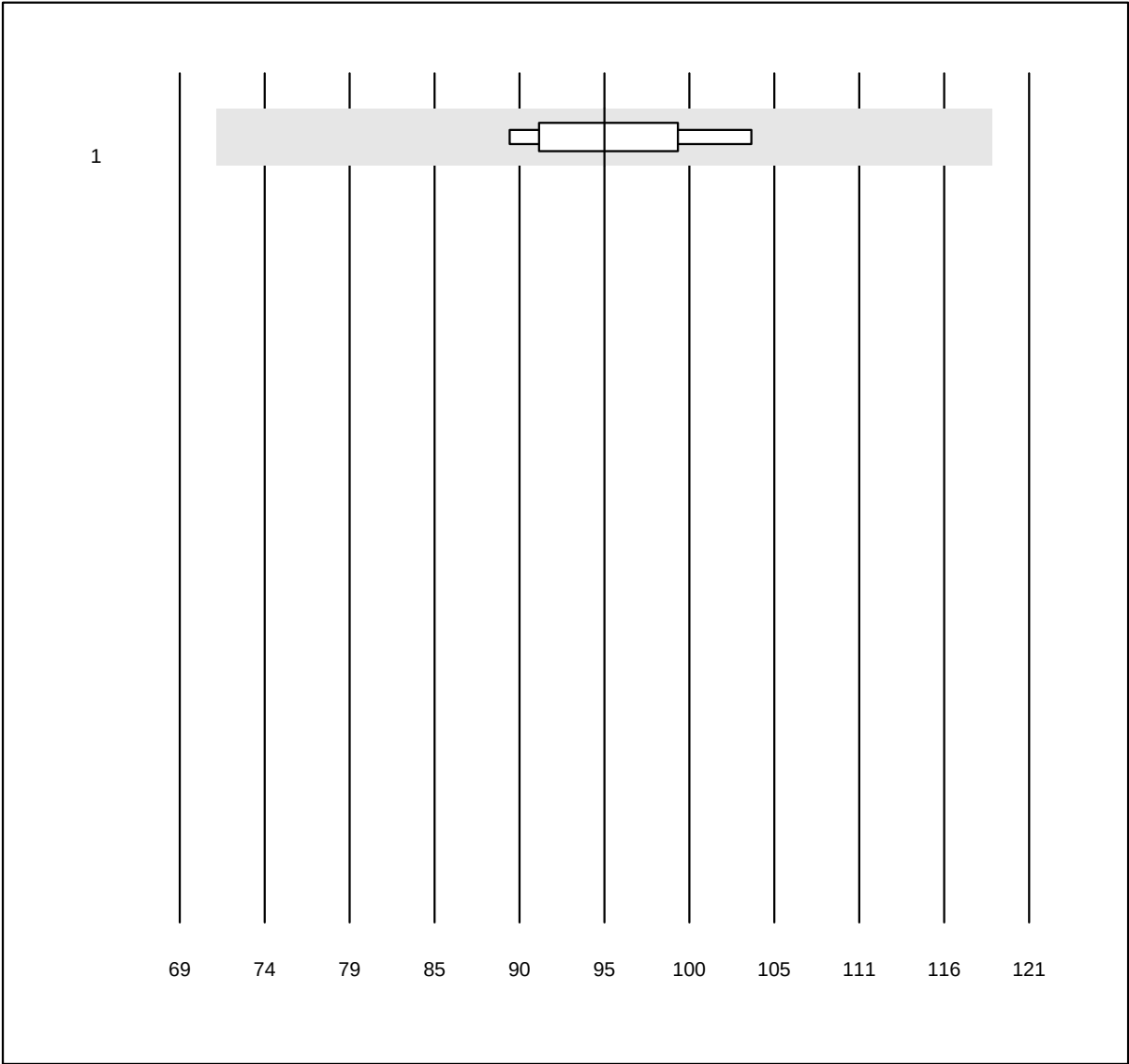


MQ Toleranz: 25%

Fattore VII (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	95.0	4.9	e

Tempo di trombina N

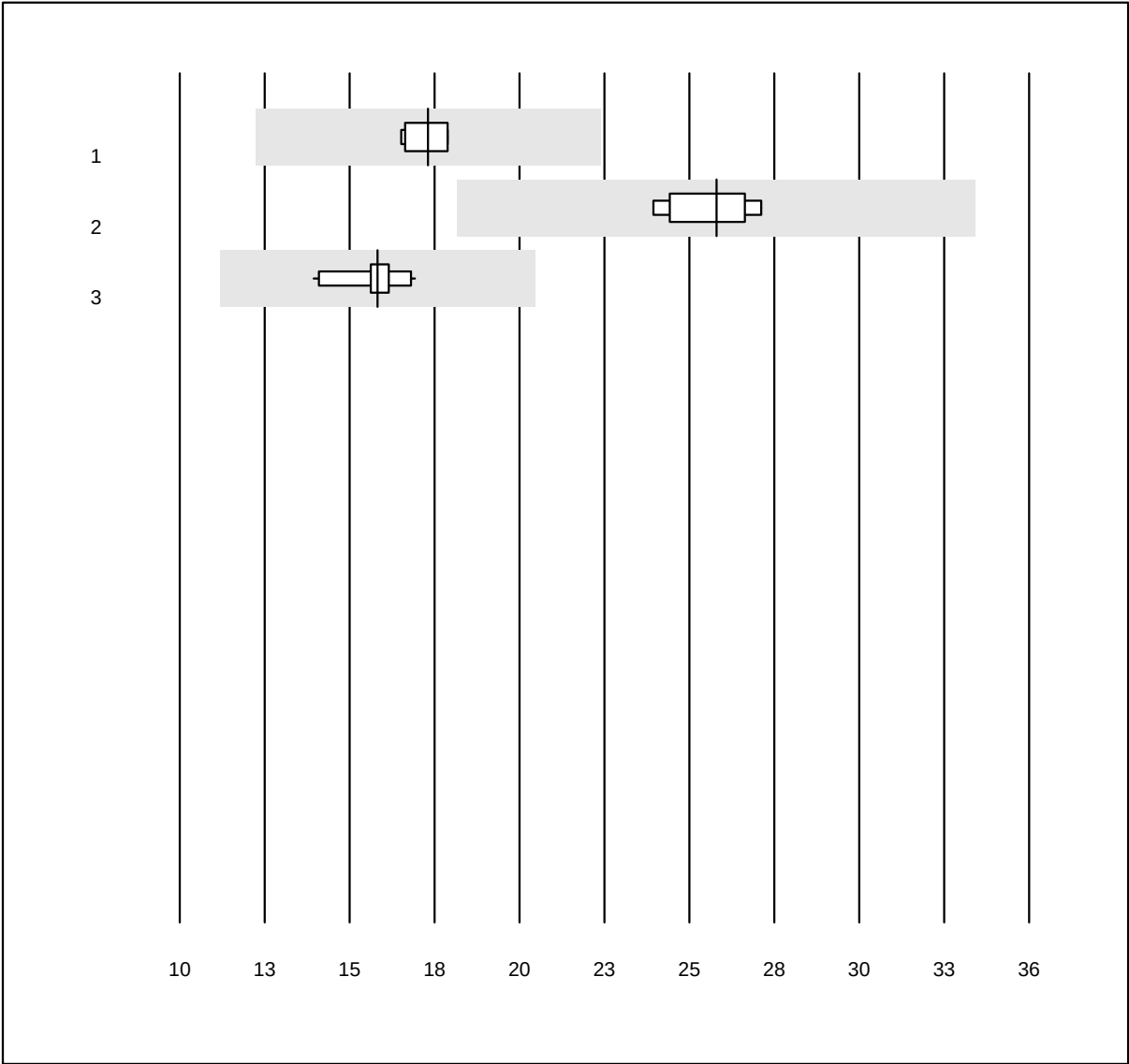


MQ Toleranz: 30%

Tempo di trombina N (Sek)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Stago/STA	7	100.0	0.0	0.0	18	3.7	e
2 ACL	9	100.0	0.0	0.0	26	4.8	e
3 altri metodi	13	100.0	0.0	0.0	16	5.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

INR H

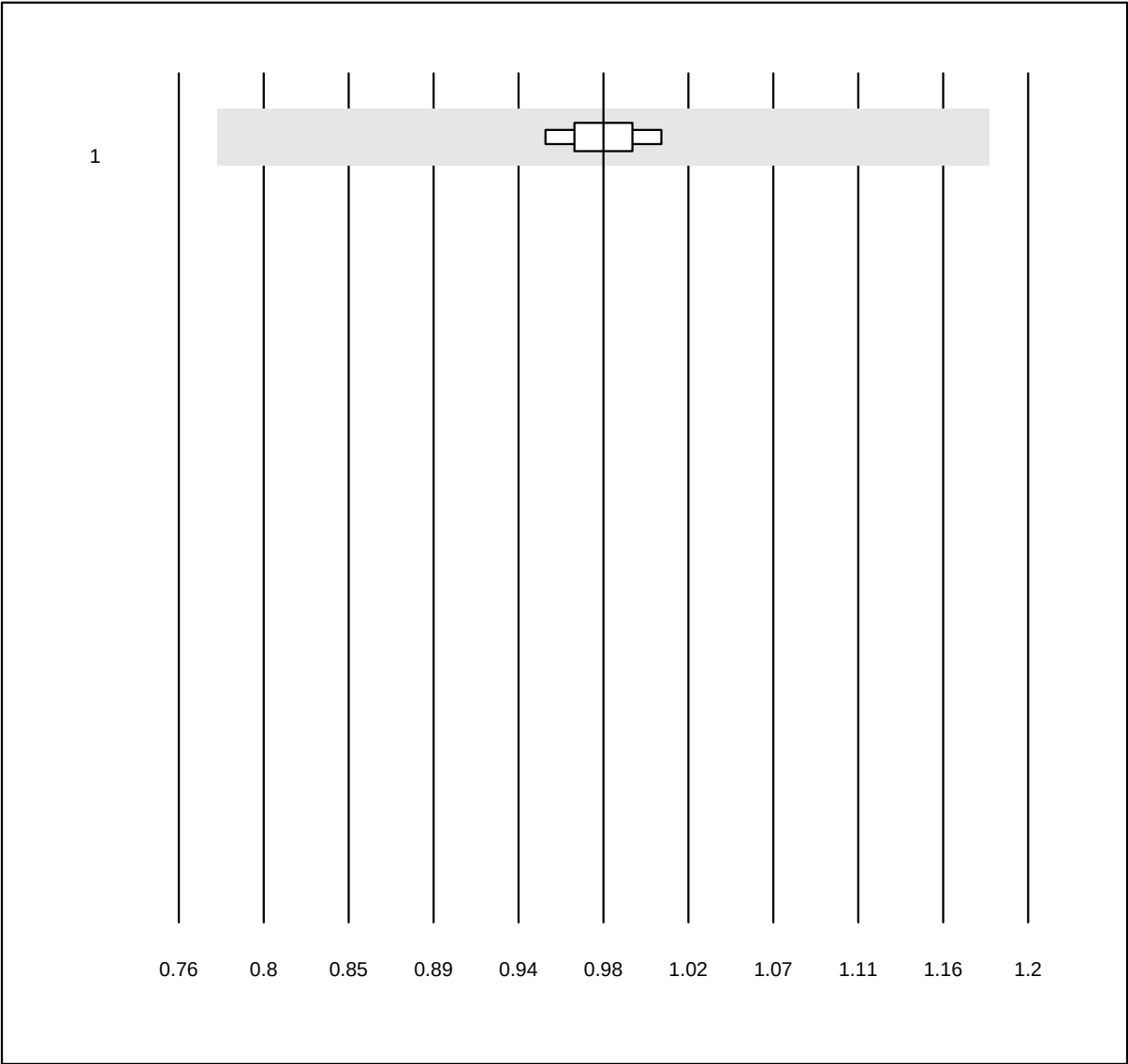


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.3: +/- 0.2 INR)

INR H (INR)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Innovin	4	100.0	0.0	0.0	0.98	1.7	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Quick H

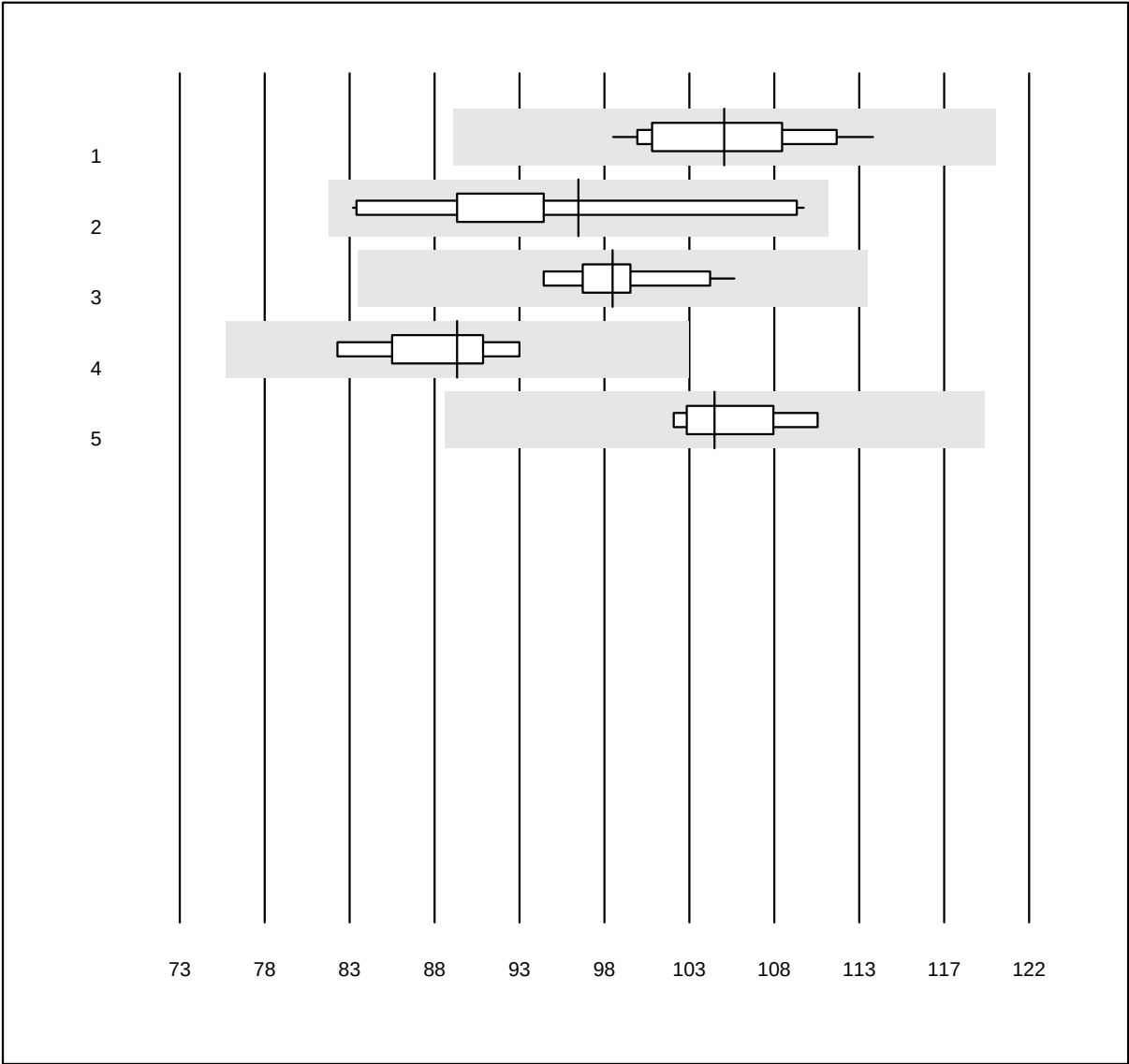


QUALAB Toleranz: 15%

Quick H (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Innovin	16	100.0	0.0	0.0	104.4	4.0	e
2 Neoplastin R	11	100.0	0.0	0.0	96.0	8.7	a*
3 Recombiplastina 2G	16	100.0	0.0	0.0	98.0	3.3	e
4 NeoPTimal	6	100.0	0.0	0.0	89.0	3.6	e
5 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	103.8	2.6	e

aPTT H

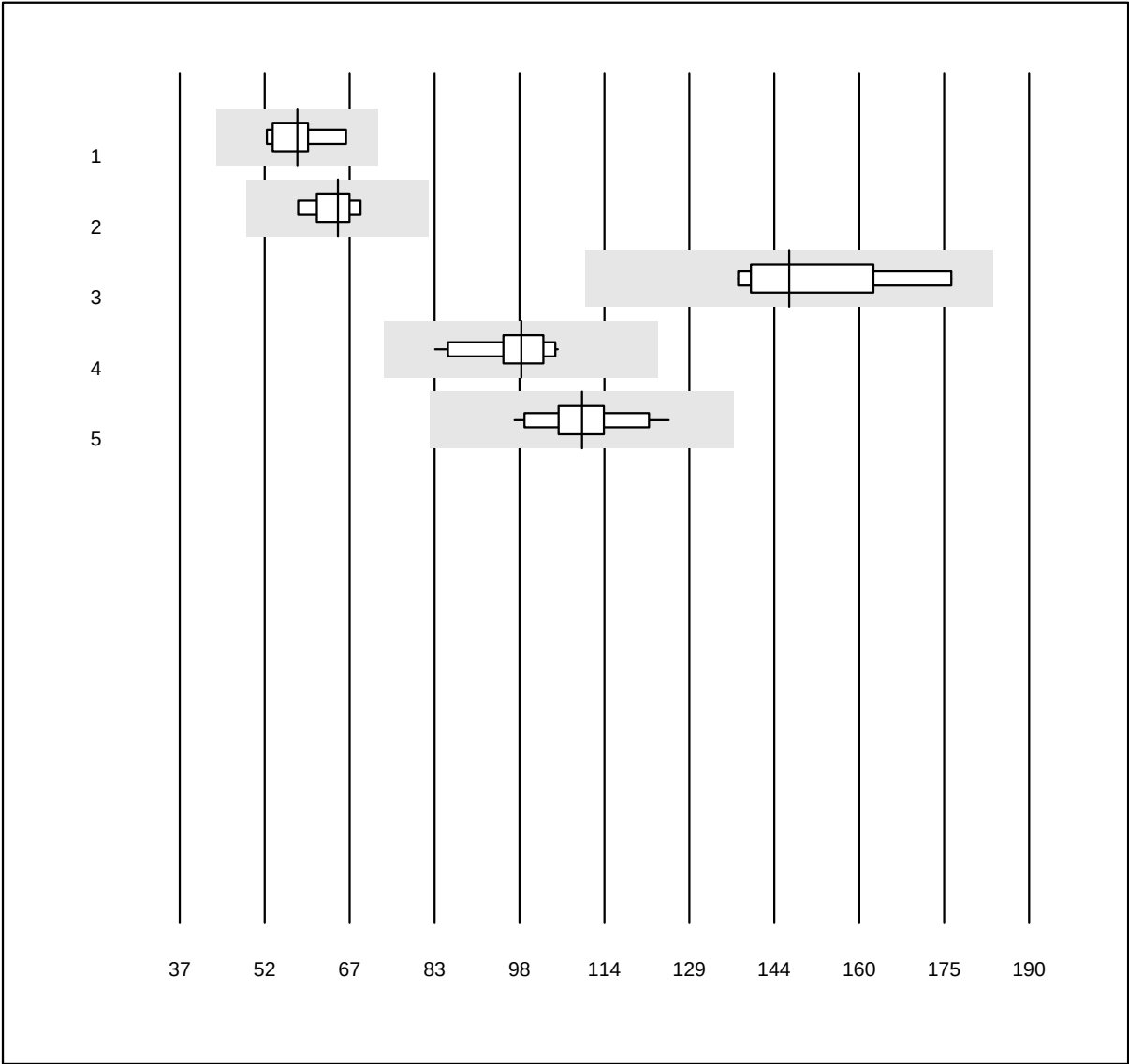


QUALAB Toleranz: 25%

aPTT H (Sek)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Actin FS	6	100.0	0.0	0.0	58.2	7.3	e
2	Actin FSL	6	100.0	0.0	0.0	65.5	5.5	e
3	Pathromtin SL	9	100.0	0.0	0.0	146.8	9.1	e*
4	aPTT-SP	11	100.0	0.0	0.0	98.5	6.1	e
5	Stago/STA	14	100.0	0.0	0.0	109.5	6.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Fibrinogeno H

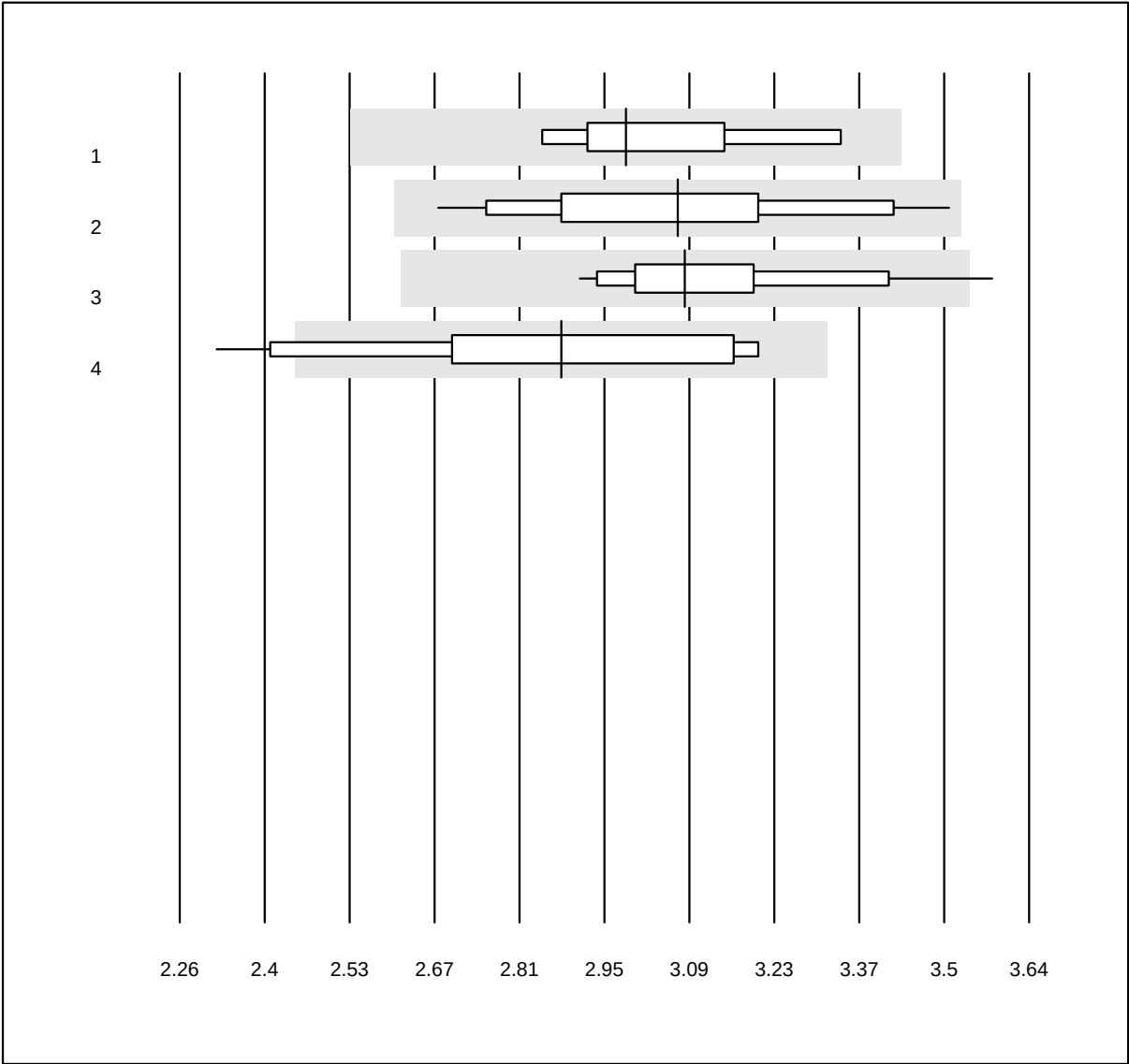


QUALAB Toleranz: 15%

Fibrinogeno H (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Trombina Siemens	6	100.0	0.0	0.0	2.98	4.8	e*
2 Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	3.07	7.0	e*
3 HemosIL	16	93.8	6.2	0.0	3.08	5.5	e
4 altri metodi	12	91.7	8.3	0.0	2.88	9.6	a*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Tempo di trombina H

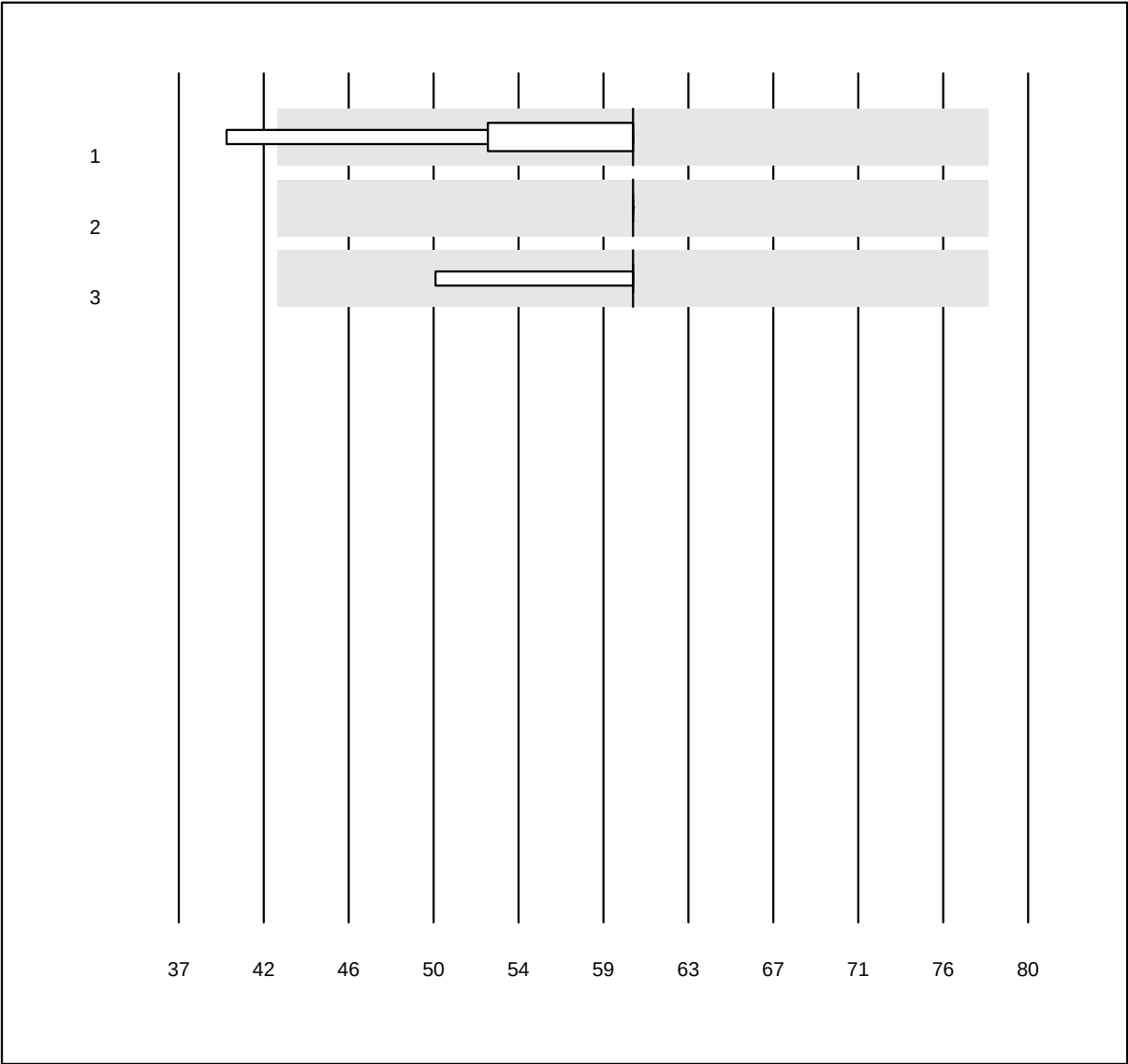


MQ Toleranz: 30%

Tempo di trombina H (Sek)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Stago/STA	5	100.0	0.0	0.0	60	11.5	e*
2 ACL	8	100.0	0.0	0.0	60	0.0	e
3 altri metodi	11	100.0	0.0	0.0	60	7.0	e

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)

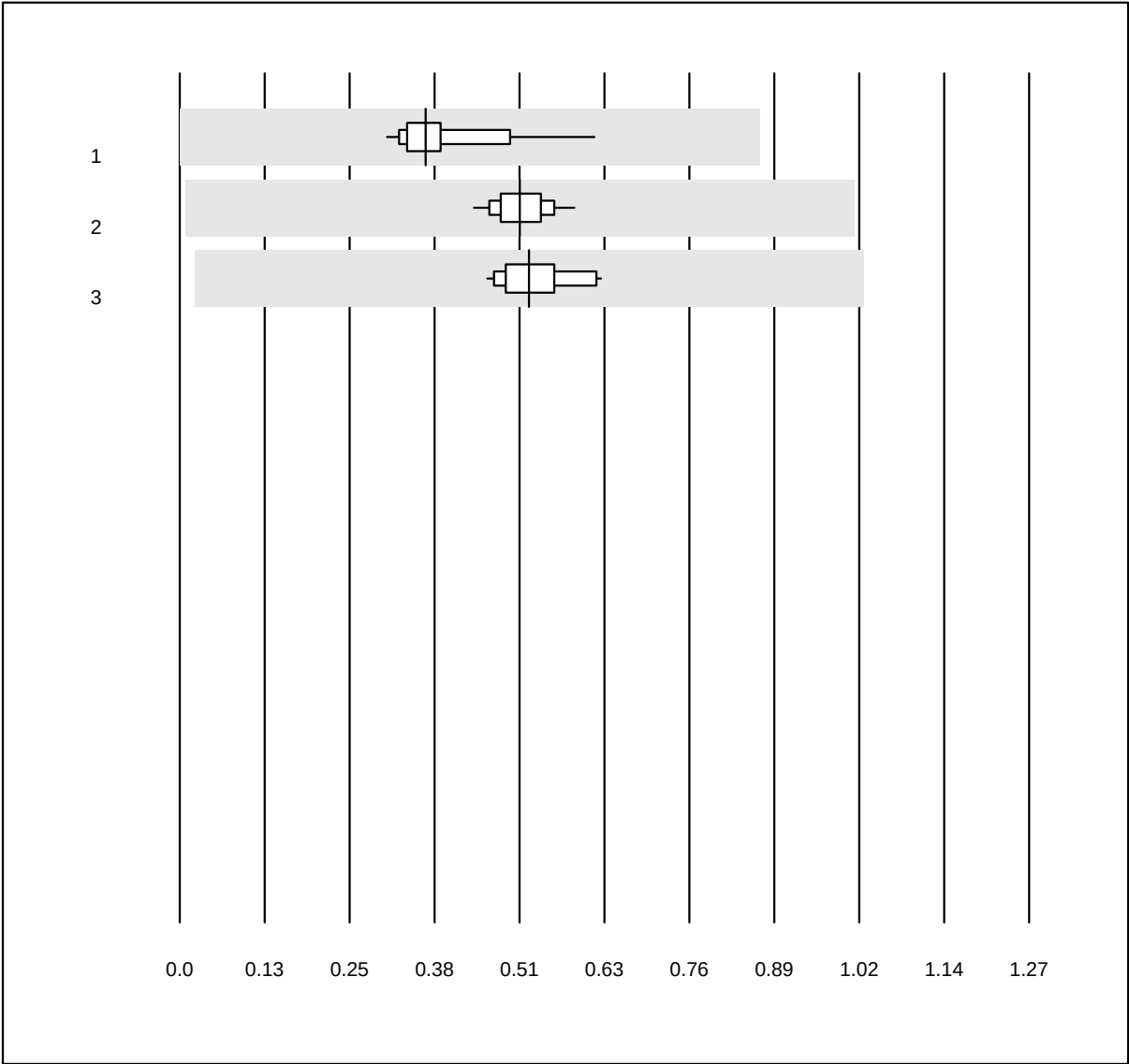


MQ Toleranz: 30%
(< 0.9: +/- 0.5 IU/ml)

Anti-FXa (unfrakt-Heparin)
(IU/ml)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Stago/STA	15	100.0	0.0	0.0	0.37	18.7	e
2 ACL	22	100.0	0.0	0.0	0.51	7.6	e
3 altri metodi	26	100.0	0.0	0.0	0.52	9.3	e

D-Dimeri

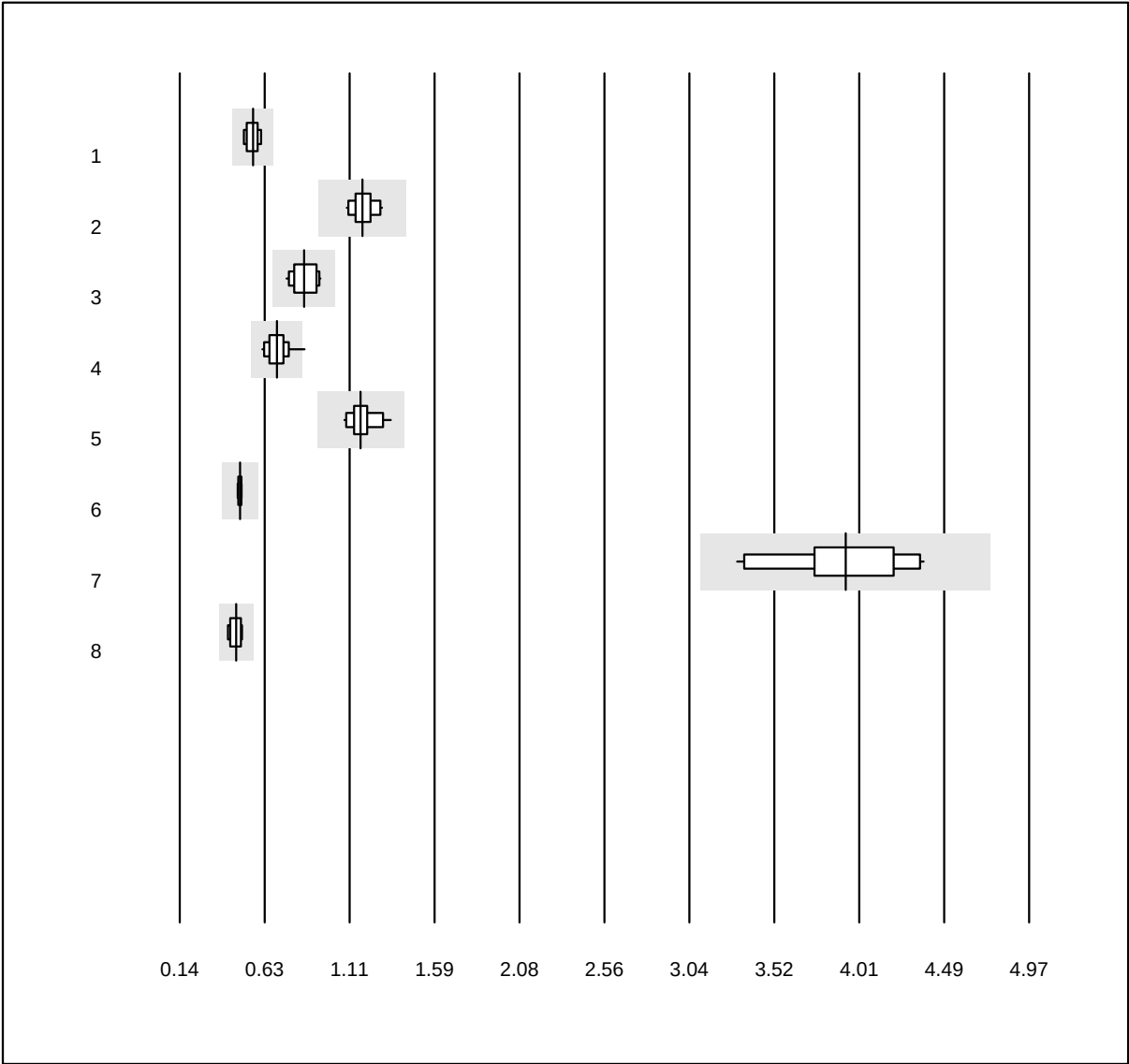


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimeri (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	5	100.0	0.0	0.0	0.56	6.0	e*
2 Siemens	18	100.0	0.0	0.0	1.18	5.0	e
3 VIDAS	16	93.8	0.0	6.2	0.85	7.4	e
4 STA Liatest	19	94.7	5.3	0.0	0.69	8.3	e
5 ACL	13	100.0	0.0	0.0	1.17	5.7	e
6 AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	0.48	2.0	e
7 Pathfast	19	100.0	0.0	0.0	3.93	8.4	e
8 Roche (plasma eparinizzato)	4	100.0	0.0	0.0	0.46	7.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

D-Dimeri qn AFIAS

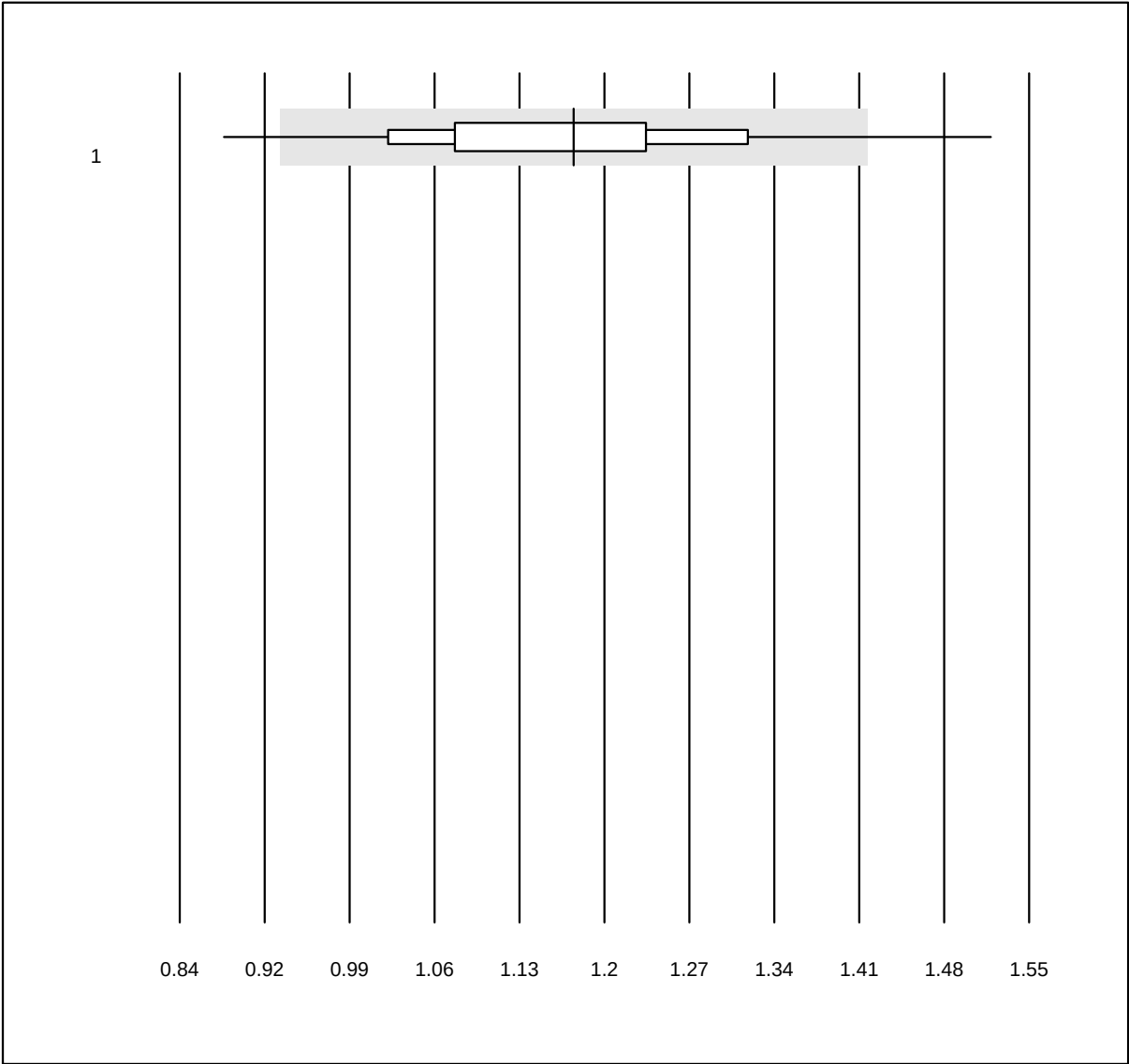


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimeri qn AFIAS (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	AFIAS	676	88.2	3.6	8.3	1.17	10.2	e

D-Dimeri Triage

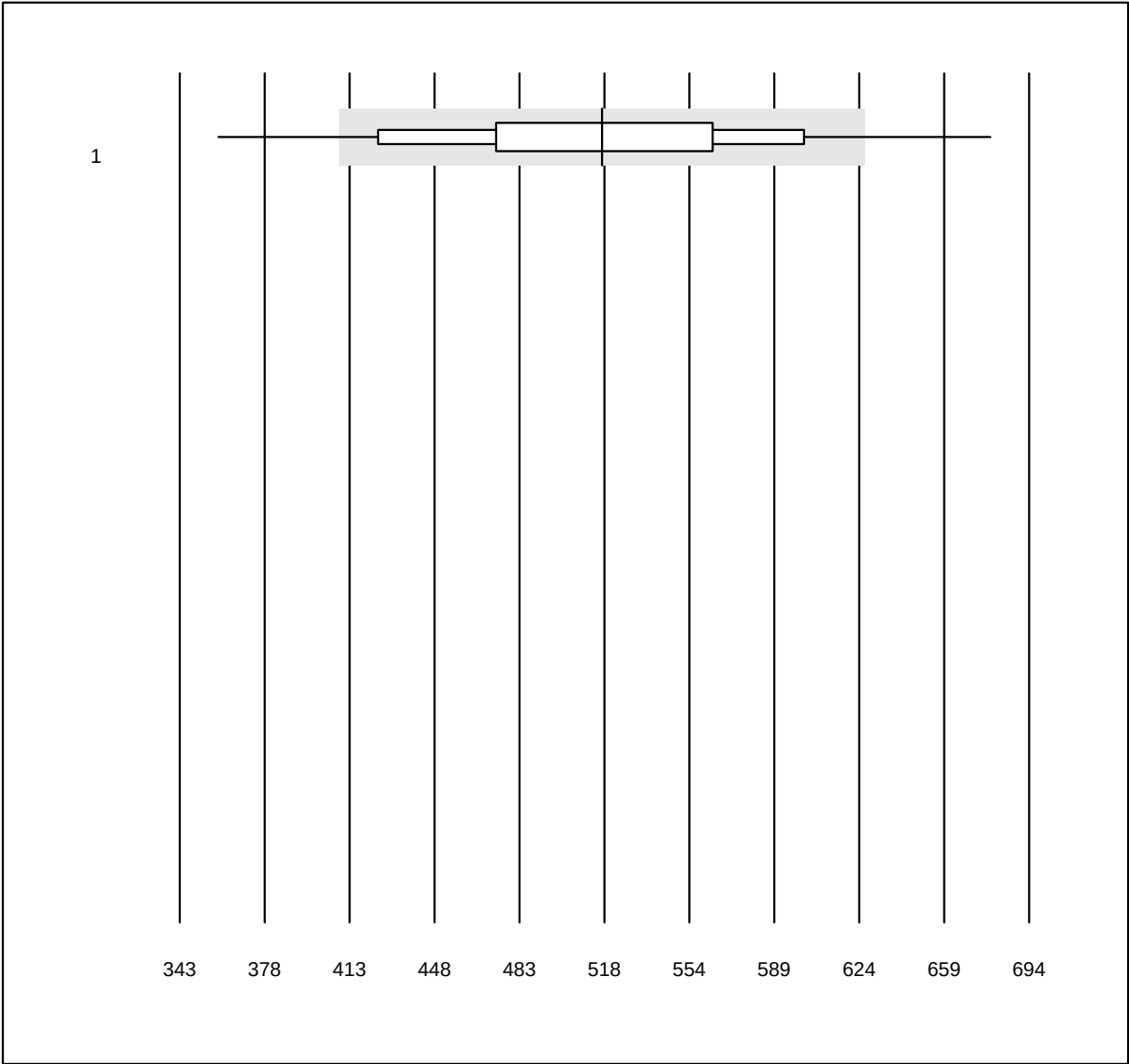


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimeri Triage (ng/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Triage	472	88.8	10.0	1.3	517.51	12.6	e

CoaguChek APTT

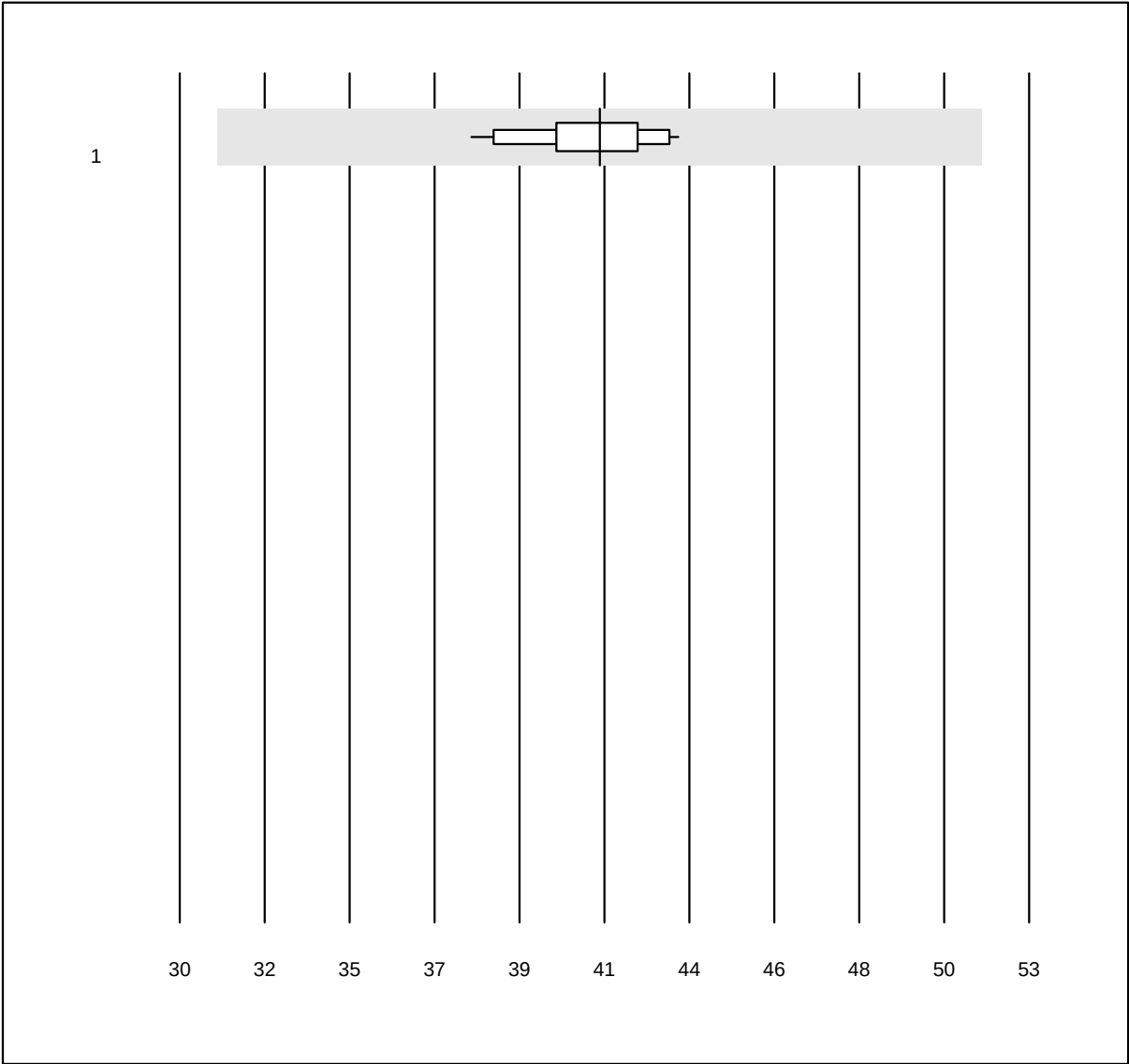


QUALAB Toleranz: 25%

CoaguChek APTT (Sek)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	CoaguChek Pro II	12	100.0	0.0	0.0	41.4	3.7	e

INR CCXS

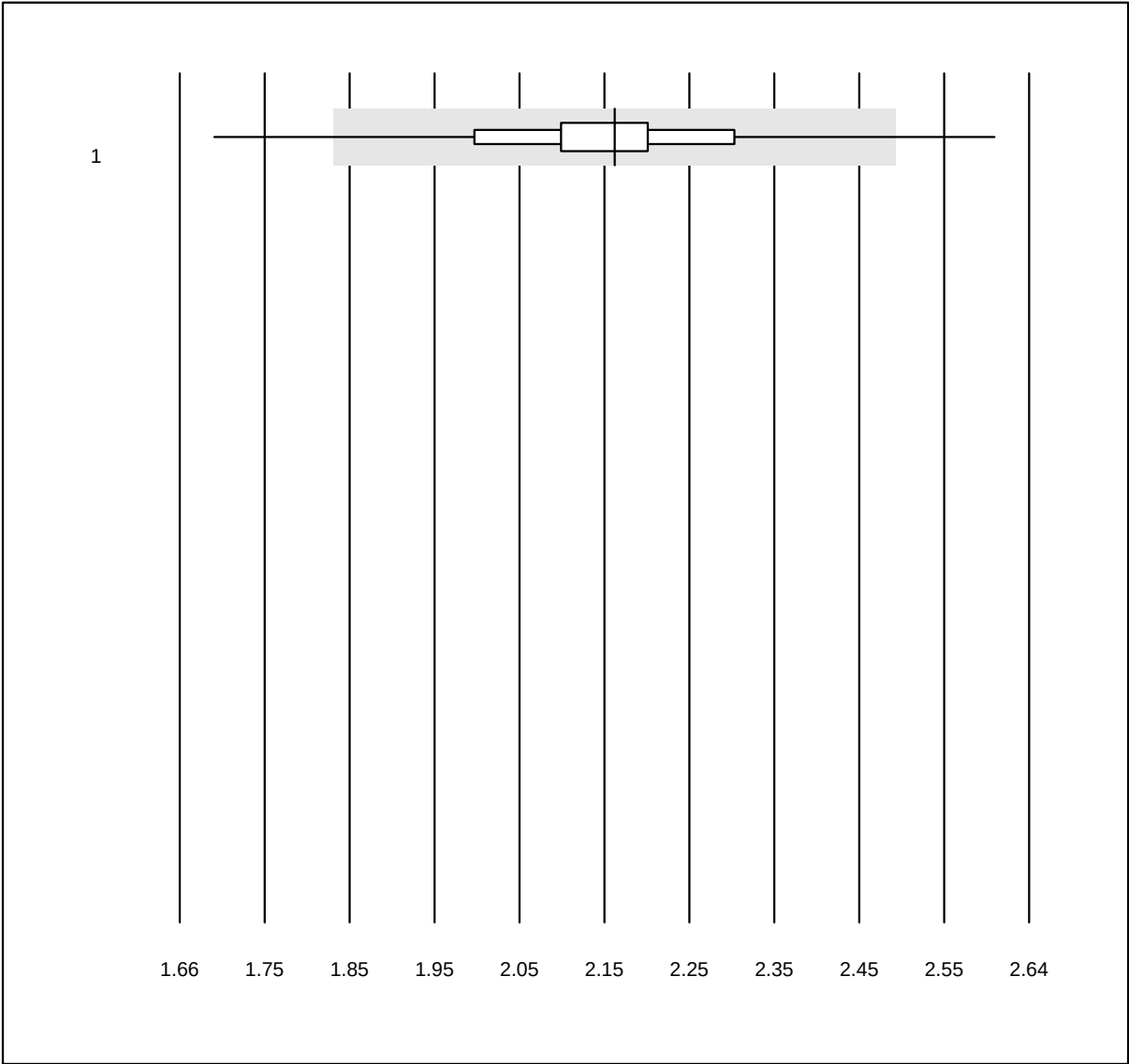


QUALAB Toleranz: 15%

INR CCXS (INR)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	CoaguChek XS	1083	98.9	0.6	0.5	2.2	4.3	e

INR HC

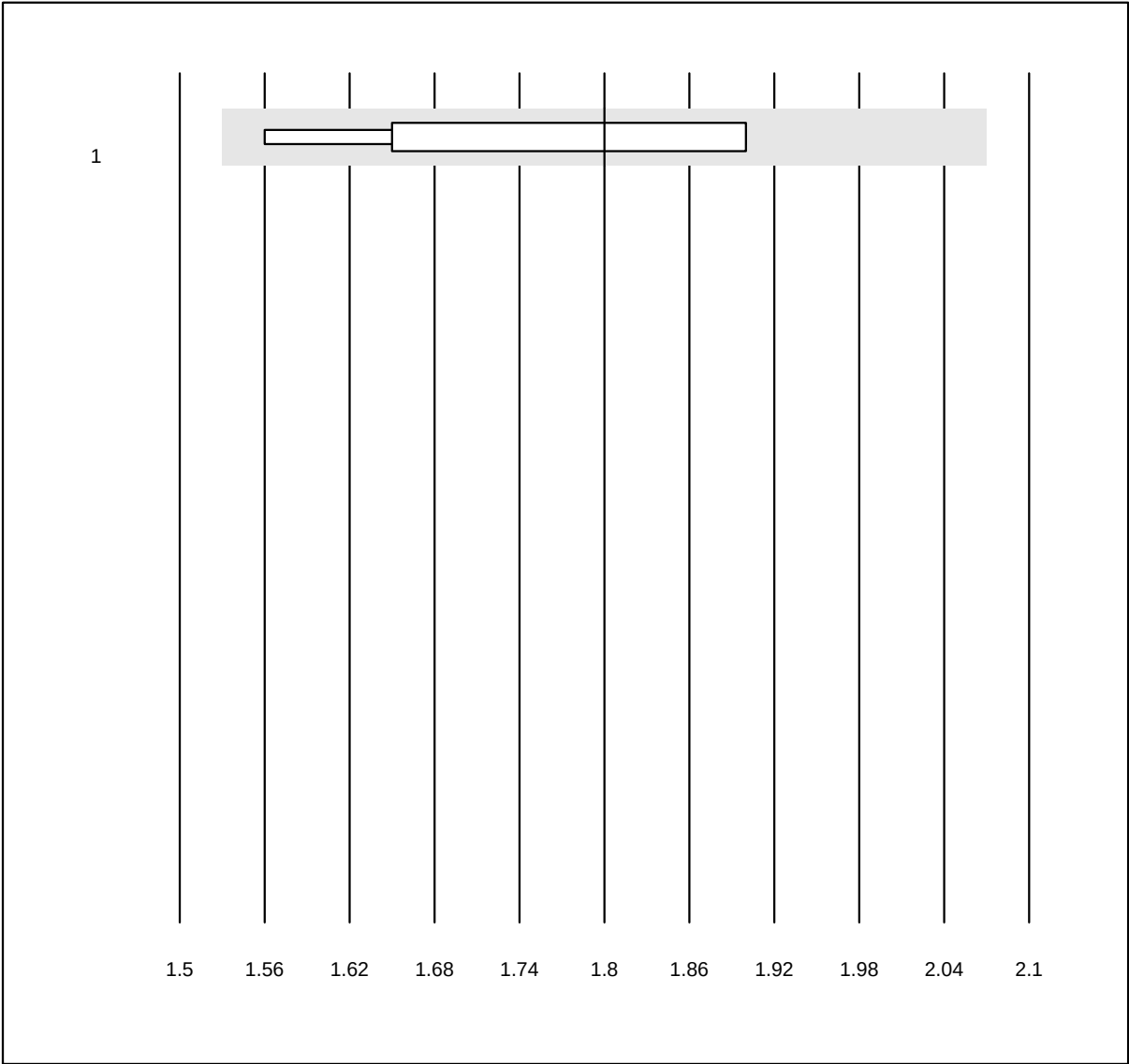


QUALAB Toleranz: 15%

INR HC ()

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Hemochron j.	5	100.0	0.0	0.0	1.8	7.3	e*

INR MI

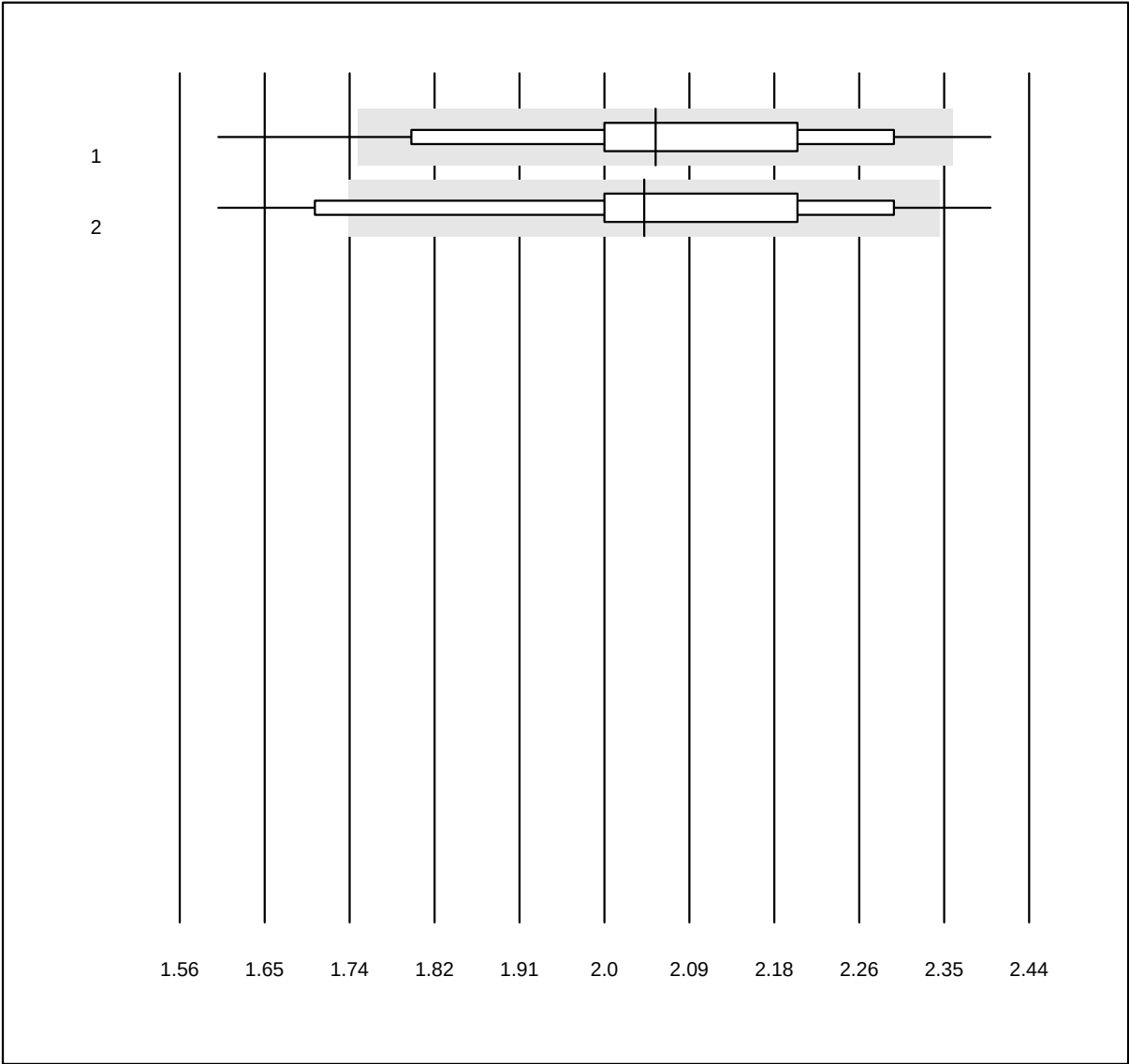


QUALAB Toleranz: 15%

INR MI ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 microINR Expert	54	85.2	5.6	9.3	2.1	8.5	e
2 microINR	98	72.4	13.3	14.3	2.0	9.5	e

INR Lumira Dx

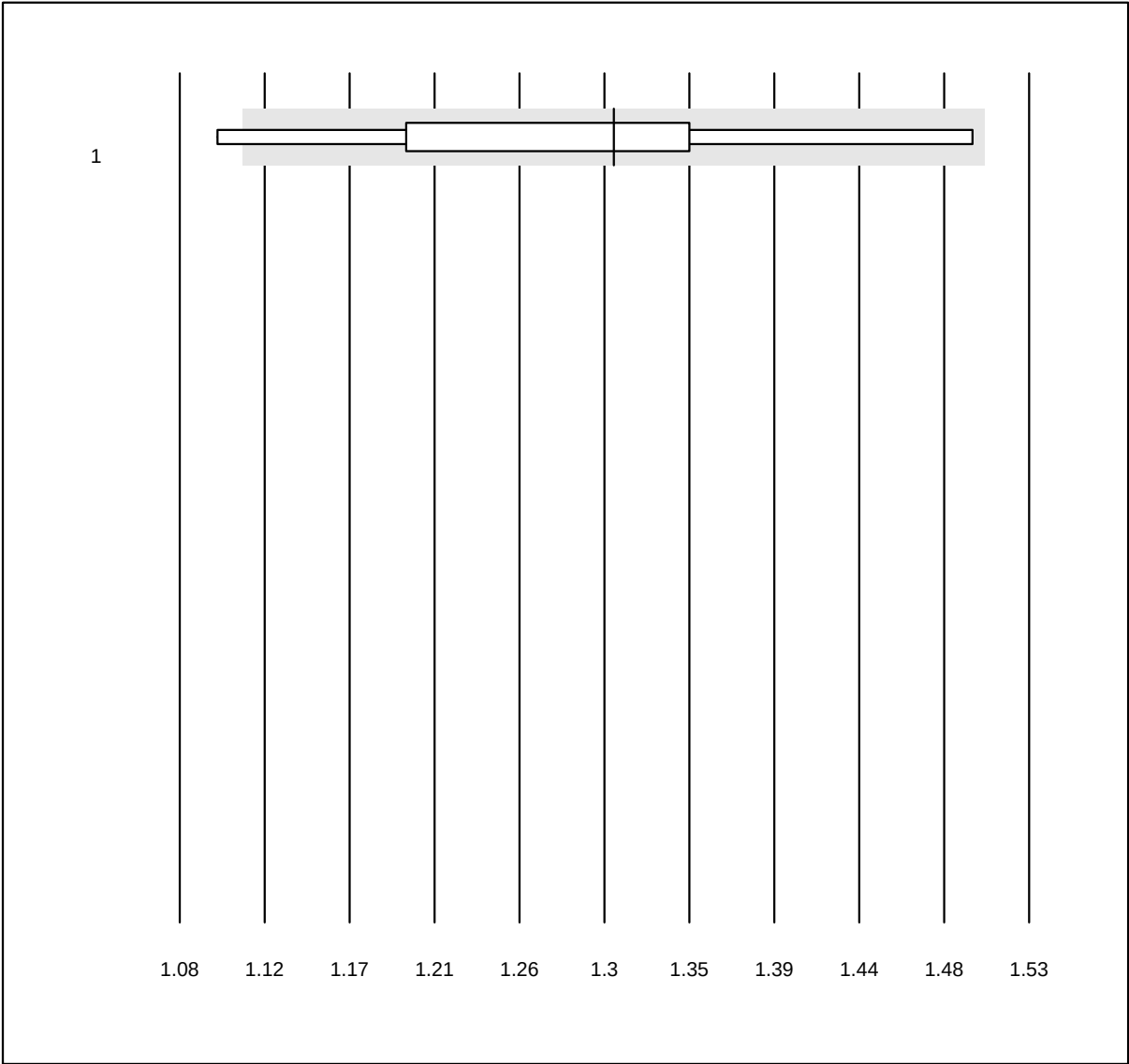


QUALAB Toleranz: 15%

INR Lumira Dx ()

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Lumira Dx	10	80.0	10.0	10.0	1.3	9.4	a*

Anti-FXa (LMW-Heparin)

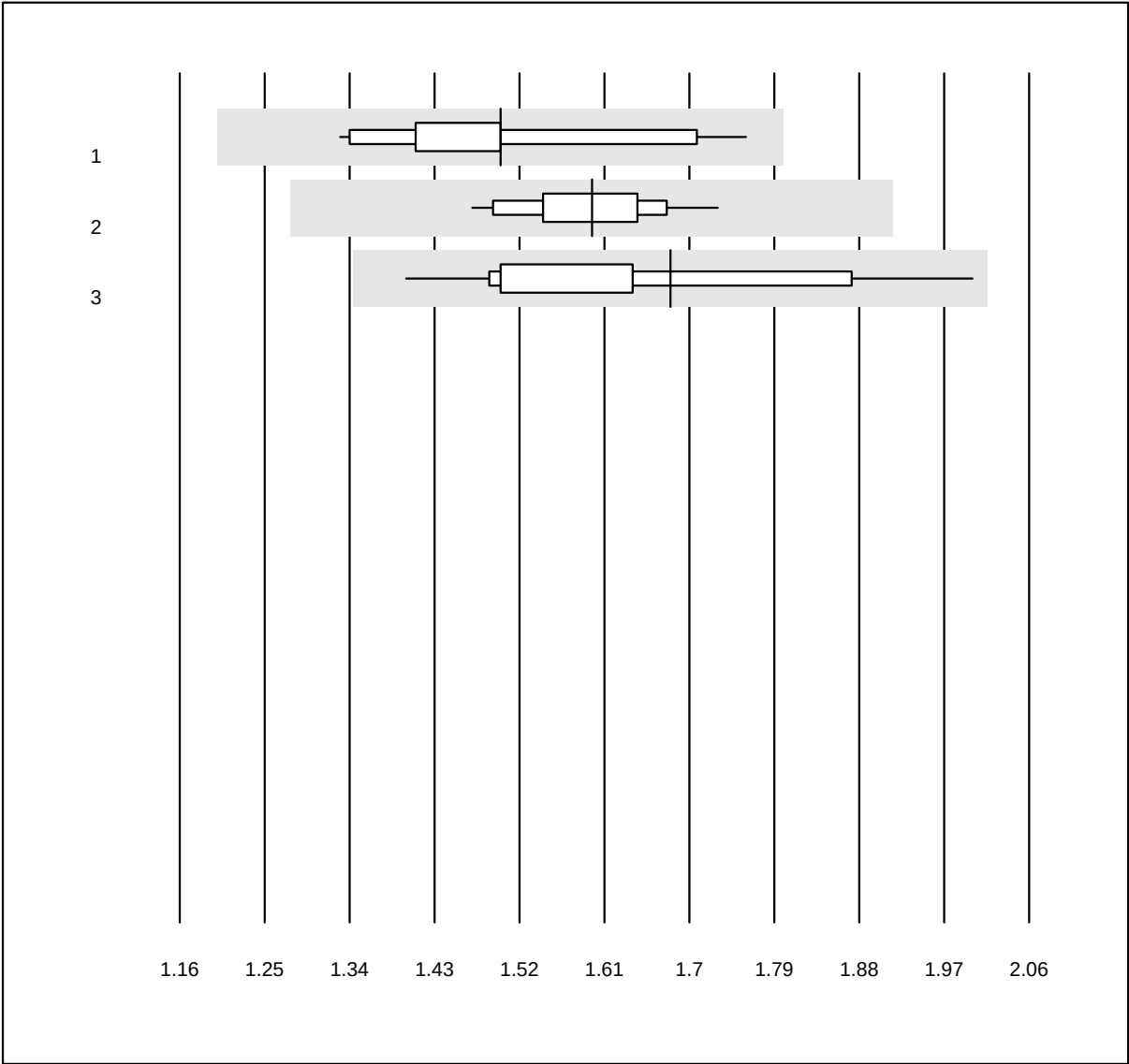


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (LMW-Heparin)
(IU/ml)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Stago/STA	11	100.0	0.0	0.0	1.50	7.5	a
2 ACL	21	100.0	0.0	0.0	1.60	4.2	e
3 altri metodi	23	100.0	0.0	0.0	1.68	9.5	a

Anti-FXa (Rivaroxaban)

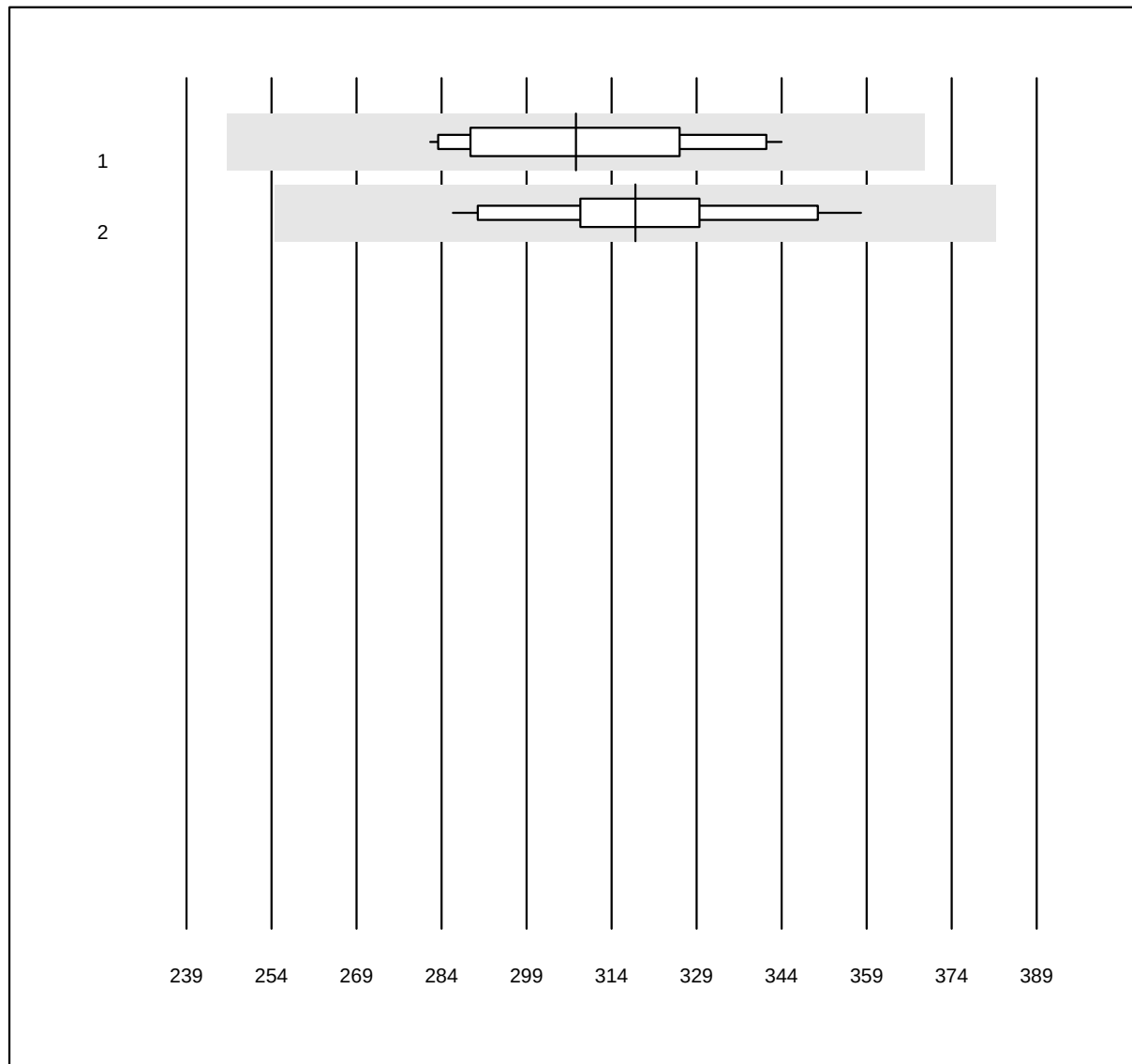


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (Rivaroxaban)
(µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ACL	11	100.0	0.0	0.0	307.72	6.6	e
2 Stago/STA	13	100.0	0.0	0.0	318.21	5.8	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Anti-FXa (Apixaban)

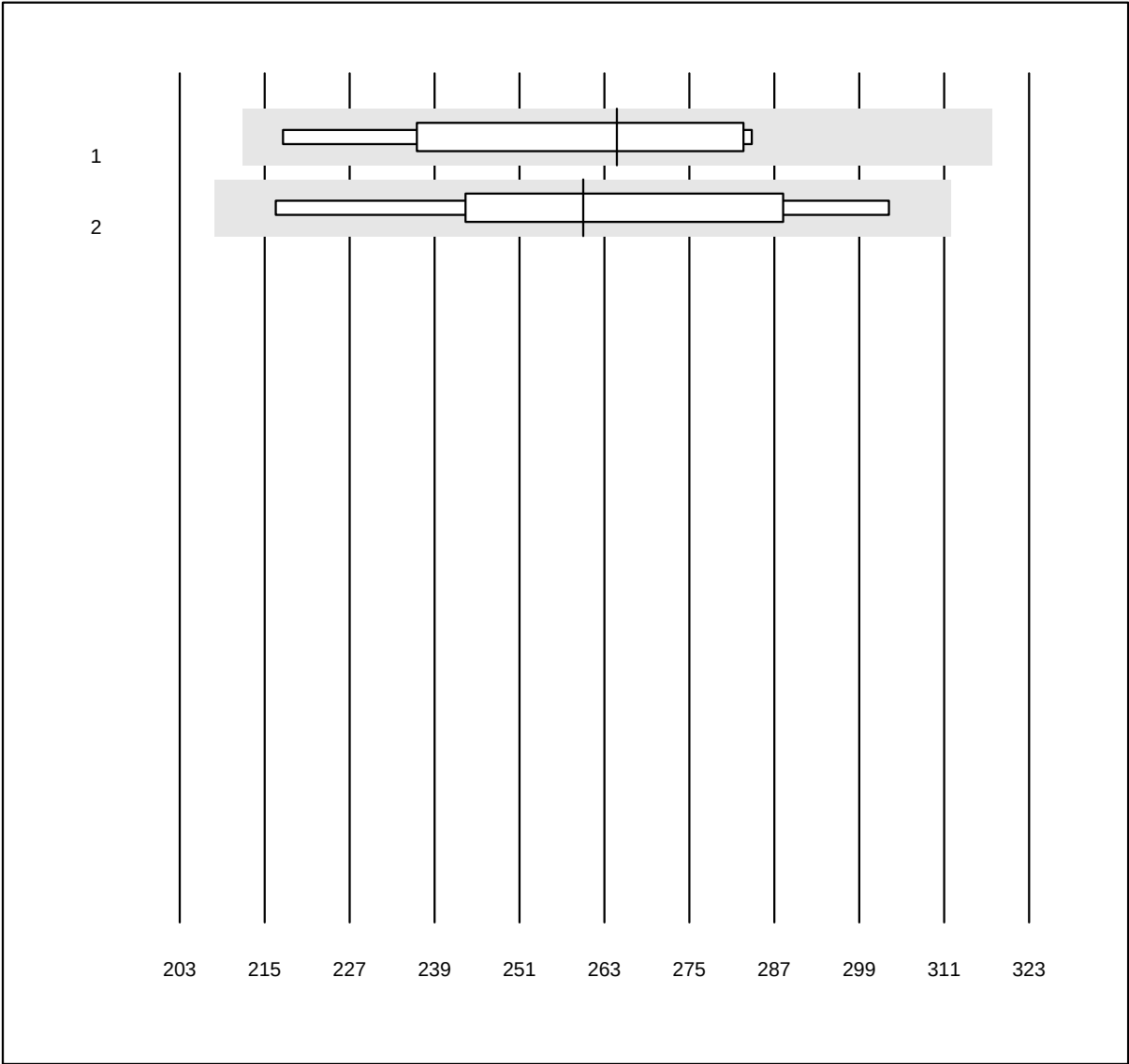


MQ Toleranz: 20%

Anti-FXa (Apixaban) (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ACL	5	100.0	0.0	0.0	264.77	9.4	e*
2 Stago/STA	8	100.0	0.0	0.0	260.00	10.6	a*

Emoglobina 1

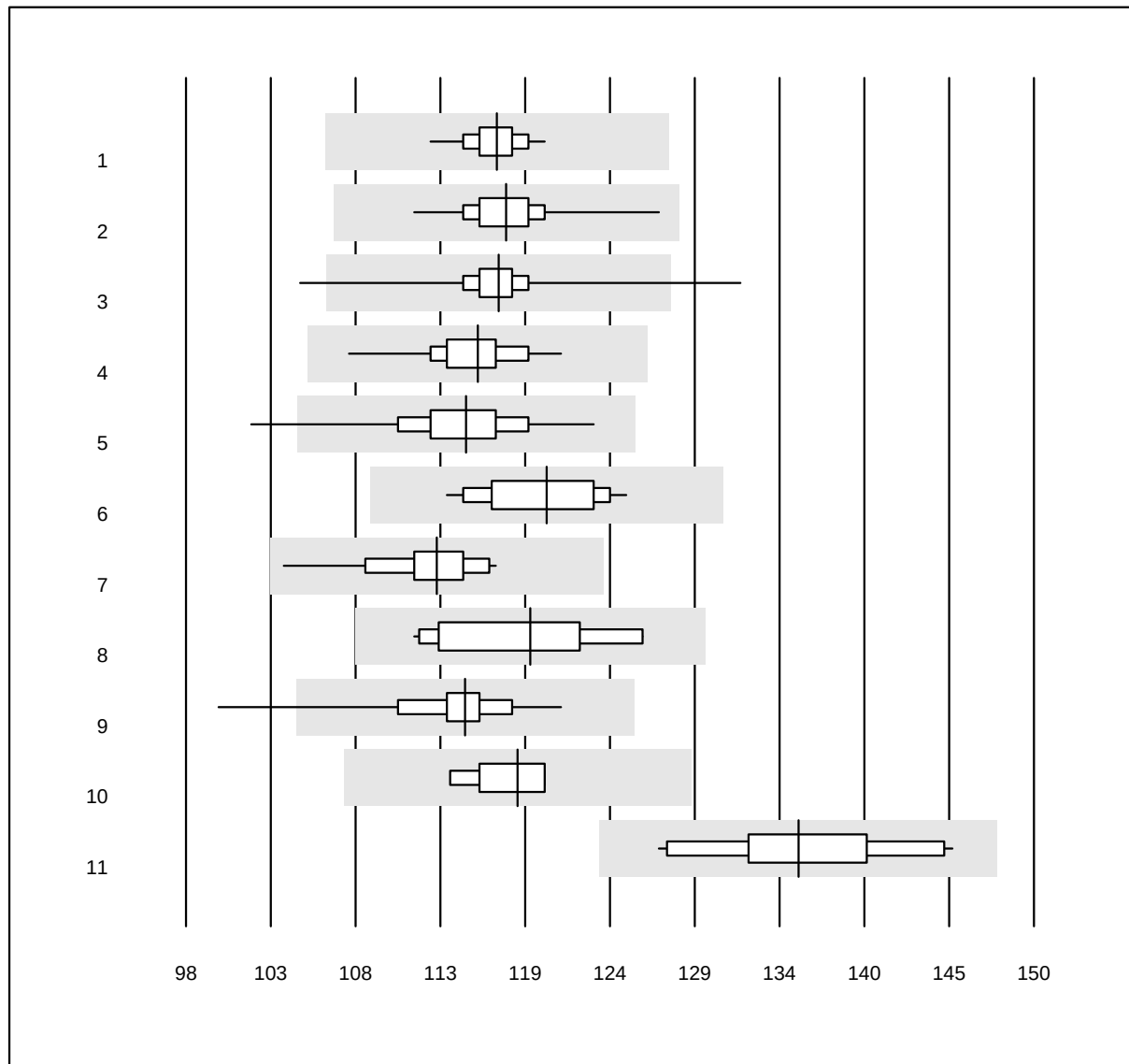


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	117.1	1.3	e
2 Sysmex XQ-320	297	98.7	0.0	1.3	117.6	1.6	e
3 Sysmex XP-300	477	97.3	1.3	1.5	117.2	2.1	e
4 Sysmex Poch-100i	174	98.9	0.0	1.1	115.9	2.1	e
5 Mythic	176	96.6	0.6	2.8	115.2	2.8	e
6 Swelab	14	100.0	0.0	0.0	120.1	2.7	e
7 Micros 60	34	97.1	0.0	2.9	113.4	2.6	e
8 DiaSpect	13	92.3	0.0	7.7	119.1	4.1	e*
9 Hemocue	372	94.6	1.9	3.5	115.1	2.6	e
10 Automatico	5	100.0	0.0	0.0	118.3	1.8	e
11 Hemocue Hb 801	14	100.0	0.0	0.0	135.6	4.1	e*

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Emoglobina 2

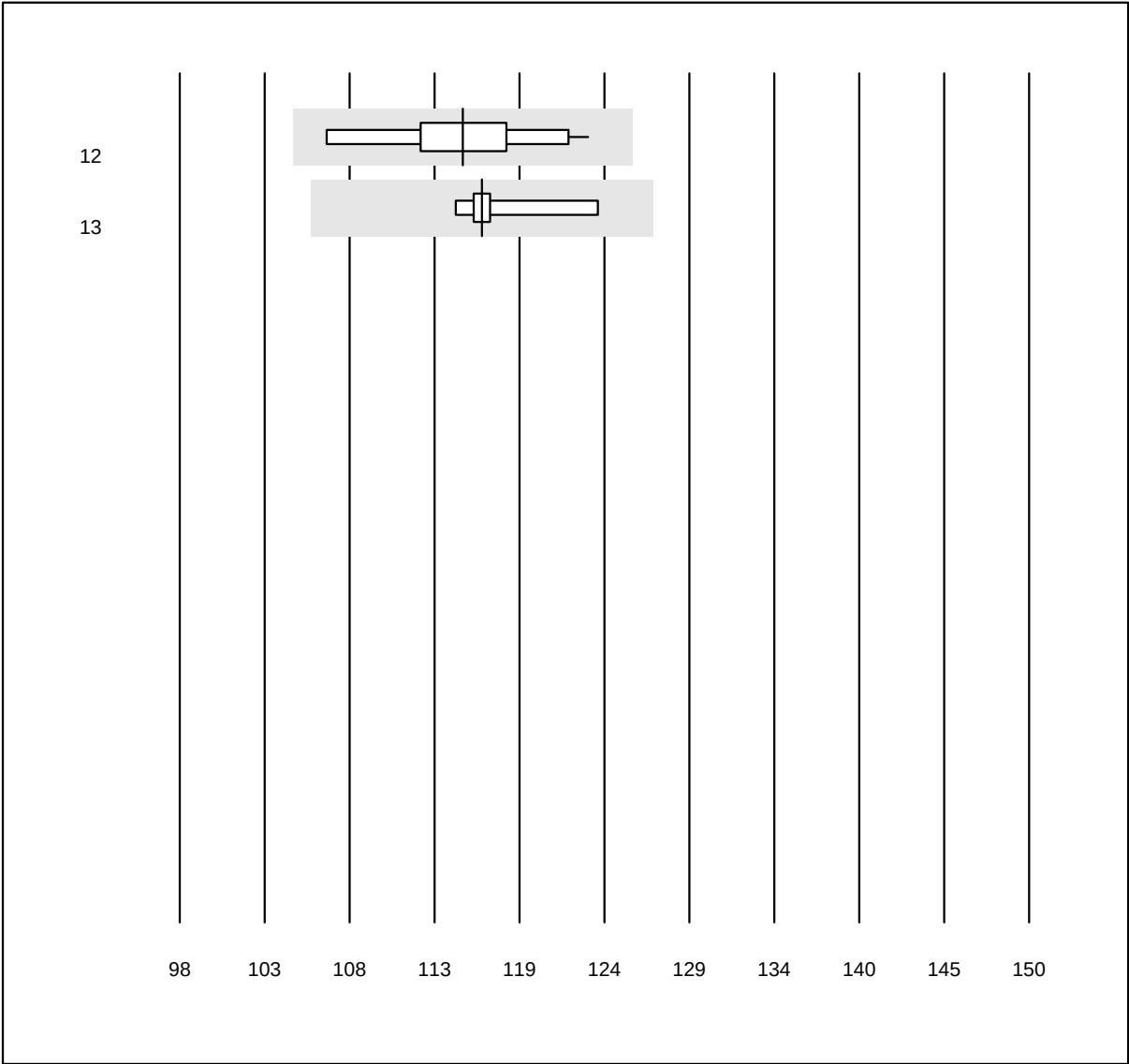


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Cianometemoglobina	12	100.0	0.0	0.0	115.3	4.1	e*
13 Hemocontrol	8	100.0	0.0	0.0	116.5	2.1	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ematocrito

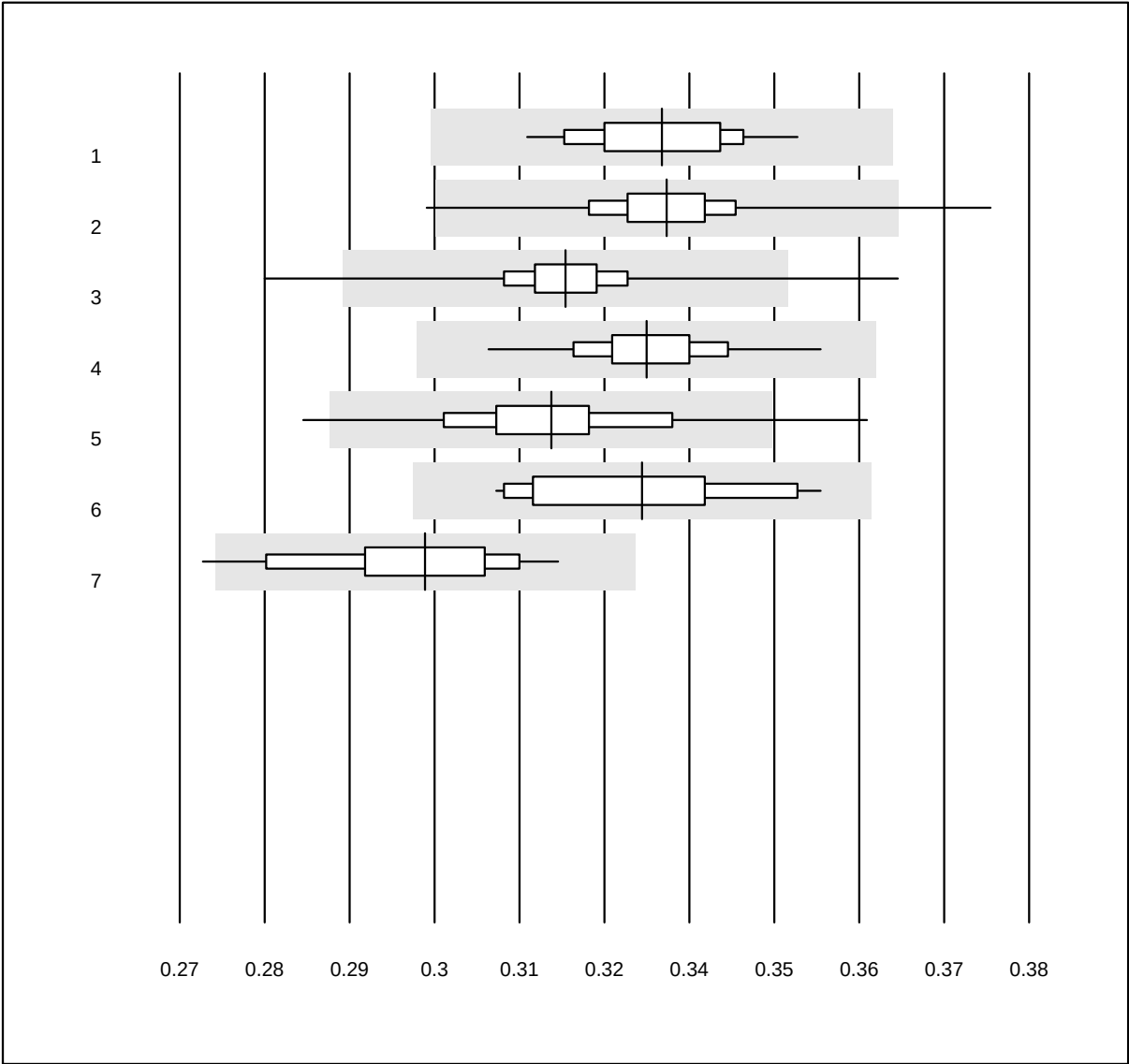


QUALAB Toleranz: 9%

Ematocrito (l/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	0.33	2.7	e
2	Sysmex XQ-320	294	98.3	0.7	1.0	0.33	2.4	e
3	Sysmex XP-300	479	97.5	0.8	1.7	0.32	2.4	e
4	Sysmex Poch-100i	174	97.1	0.0	2.9	0.33	2.2	e
5	Mythic	176	93.8	3.4	2.8	0.32	3.7	e
6	Swelab	14	100.0	0.0	0.0	0.33	4.0	e
7	Micros 60	34	94.1	2.9	2.9	0.30	3.9	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Eritrociti

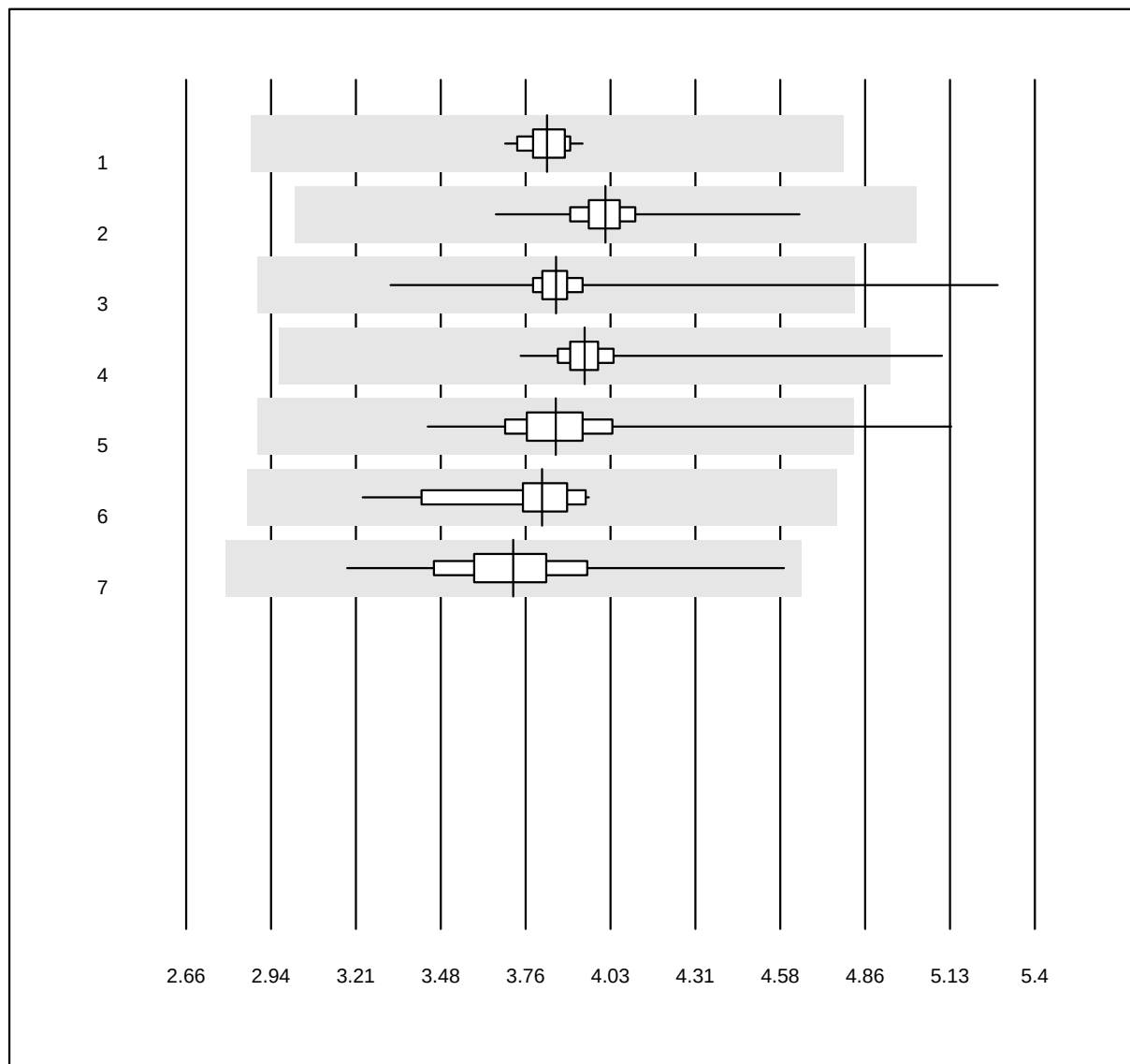


QUALAB Toleranz: 25%

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	3.83	1.7	e
2 Sysmex XQ-320	295	99.0	0.0	1.0	4.01	2.5	e
3 Sysmex XP-300	478	99.4	0.2	0.4	3.85	3.3	e
4 Sysmex Poch-100i	174	98.3	0.6	1.1	3.95	2.9	e
5 Mythic	176	97.7	0.6	1.7	3.85	4.4	e
6 Swelab	14	100.0	0.0	0.0	3.81	4.8	e
7 Micros 60	34	100.0	0.0	0.0	3.72	6.5	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Leucociti

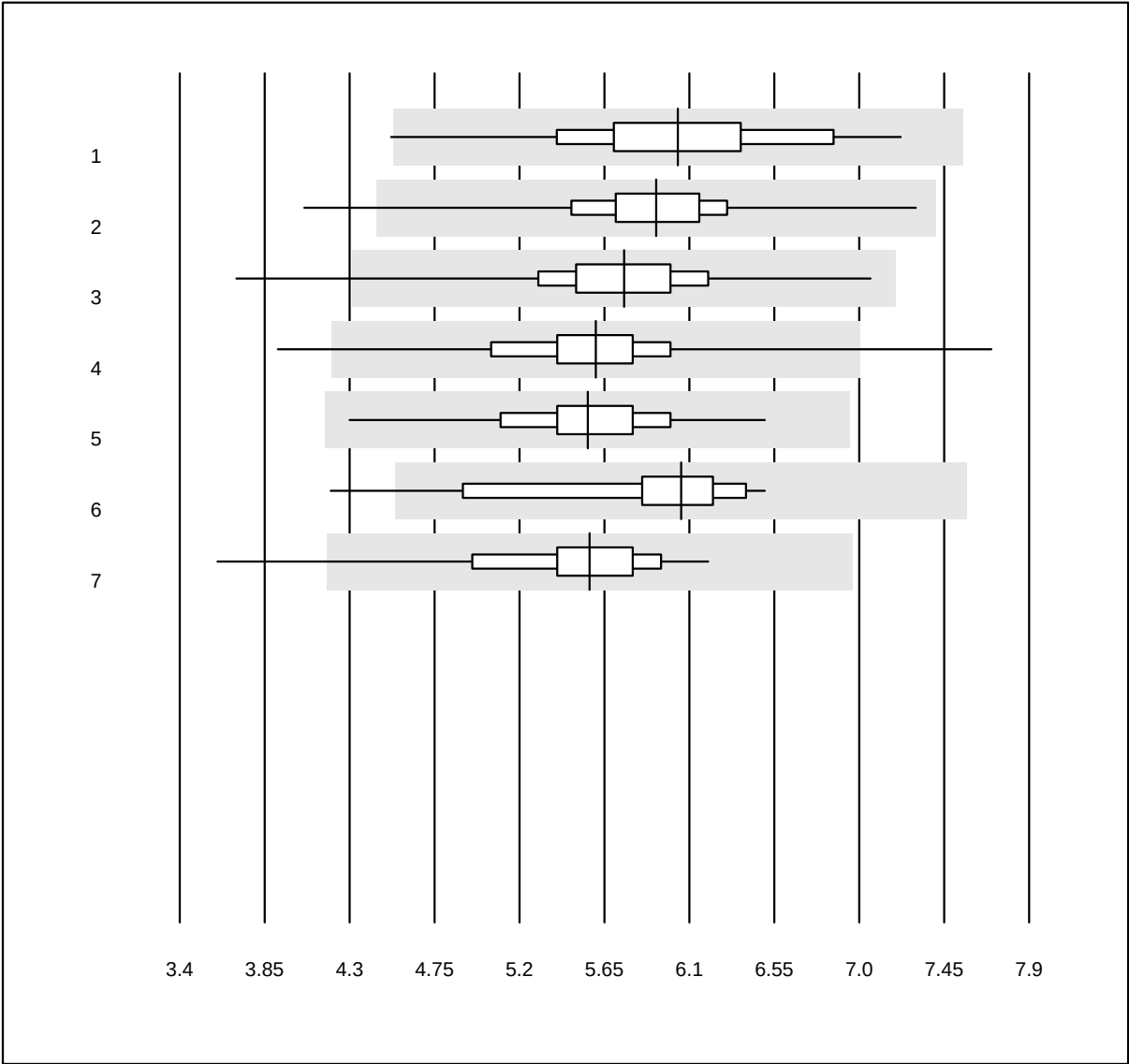


QUALAB Toleranz: 25%

Leucociti (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex XN	58	98.3	1.7	0.0	6.04	8.6	e
2	Sysmex XQ-320	294	99.3	0.7	0.0	5.92	6.7	e
3	Sysmex XP-300	478	97.9	1.3	0.8	5.75	7.0	e
4	Sysmex Poch-100i	174	97.7	2.3	0.0	5.60	8.1	e
5	Mythic	175	100.0	0.0	0.0	5.56	6.9	e
6	Swelab	14	92.9	7.1	0.0	6.06	9.4	e
7	Micros 60	34	97.1	2.9	0.0	5.57	8.6	e

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Trombociti

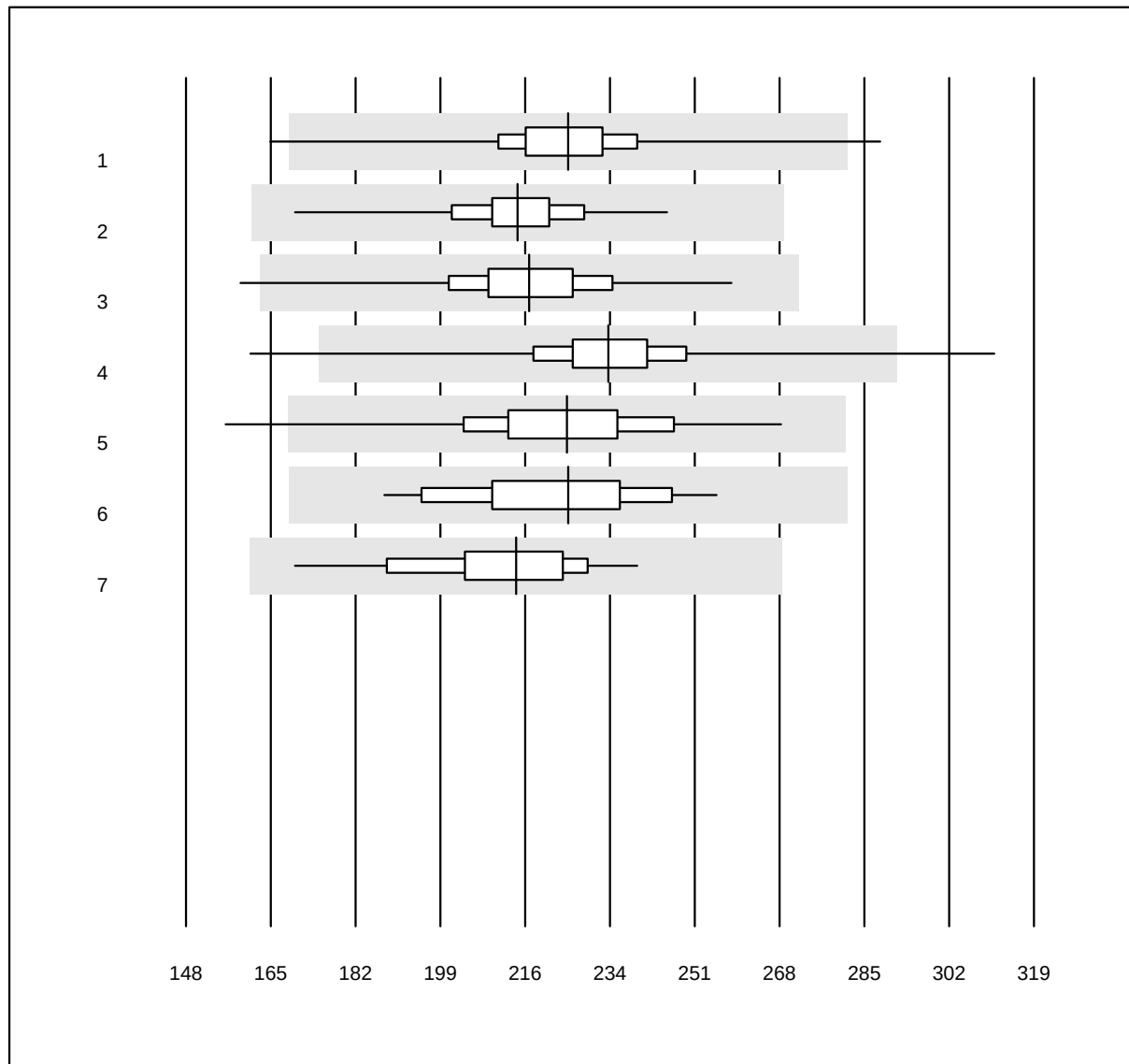


QUALAB Toleranz: 25%

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex Poch-100i	174	98.3	1.1	0.6	225.1	6.0	e
2 Sysmex XN	58	100.0	0.0	0.0	214.9	5.7	e
3 Sysmex XQ-320	295	99.0	0.3	0.7	217.2	6.6	e
4 Sysmex XP-300	477	98.1	0.4	1.5	233.2	5.9	e
5 Mythic	176	98.3	1.1	0.6	224.8	7.5	e
6 Swelab	14	100.0	0.0	0.0	225.1	7.8	e
7 Micros 60	34	94.1	0.0	5.9	214.6	7.2	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Emoglobina H2

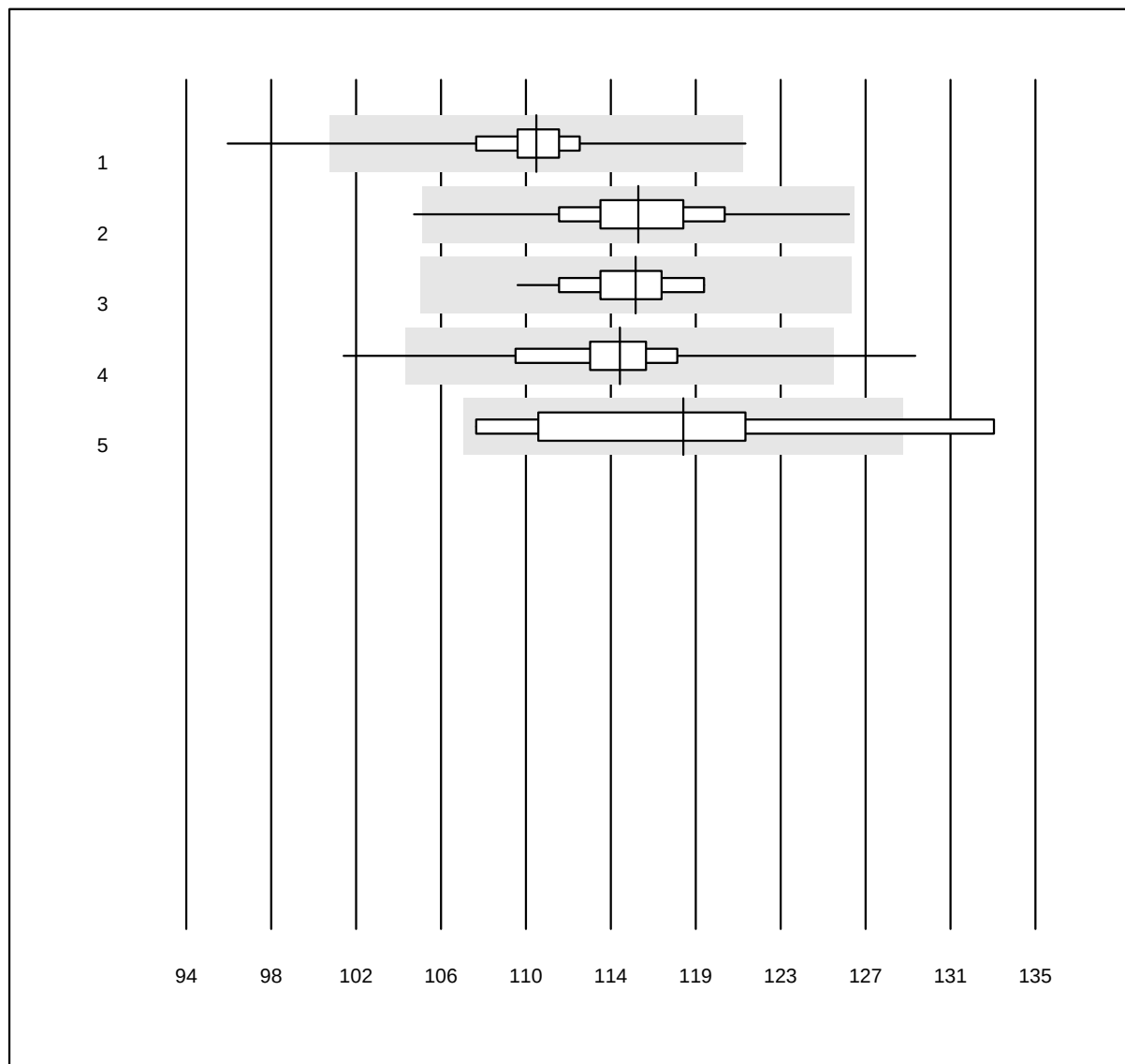


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina H2 (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	964	95.6	1.7	2.7	110.9	2.4	e
2 Zybio Z3	376	98.1	0.5	1.3	115.8	2.8	e
3 Nihon Kohden	30	93.3	0.0	6.7	115.7	1.9	e
4 MEK-1303/5	101	92.1	5.0	3.0	114.9	3.5	e
5 Dymind DP-H10	9	88.9	11.1	0.0	118.0	6.3	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ematocrito H2

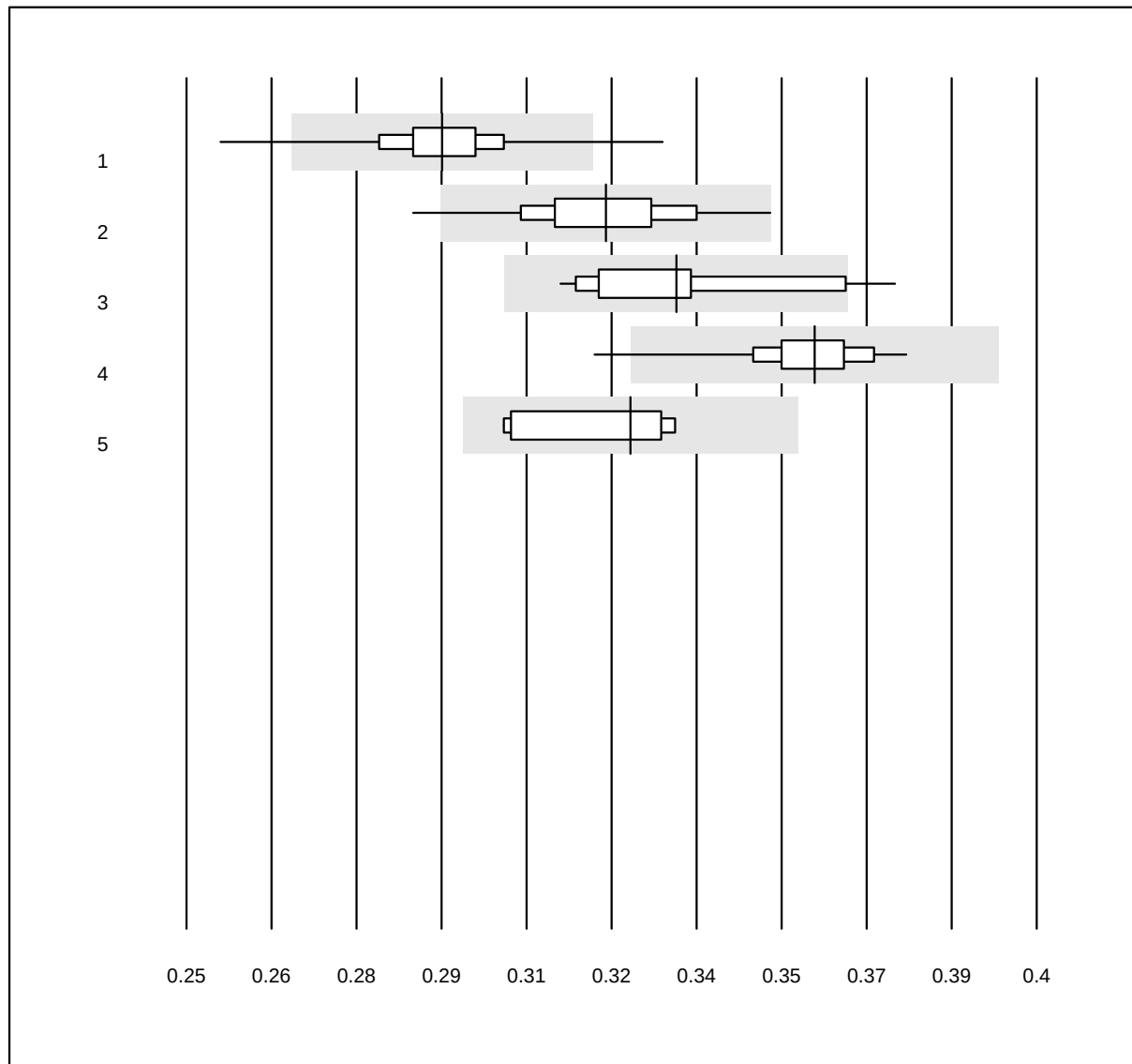


QUALAB Toleranz: 9%

Ematocrito H2 (l/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	964	94.8	2.3	2.9	0.30	3.3	e
2 Zybion Z3	377	97.3	0.8	1.9	0.32	3.7	e
3 Nihon Kohden	30	86.7	6.7	6.7	0.34	5.2	e
4 MEK-1303/5	100	95.0	1.0	4.0	0.36	2.4	e
5 Dymind DP-H10	9	88.9	0.0	11.1	0.33	4.0	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Eritrociti H2

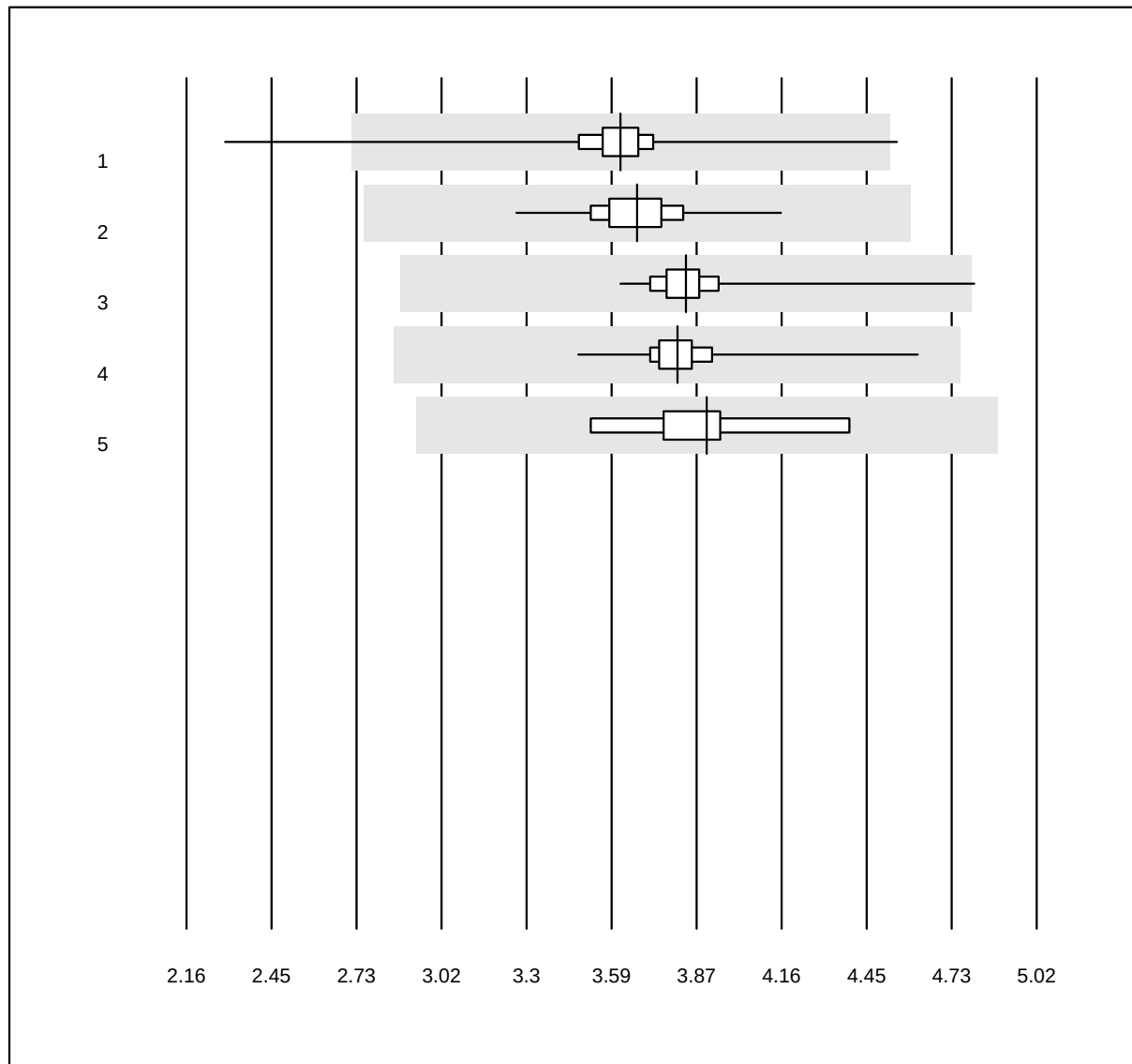


QUALAB Toleranz: 25%

Eritrociti H2 (T/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	964	97.9	1.0	1.0	3.62	4.6	e
2 Zybion Z3	377	97.6	0.0	2.4	3.68	3.4	e
3 Nihon Kohden	30	93.3	3.3	3.3	3.84	5.2	e
4 MEK-1303/5	100	100.0	0.0	0.0	3.81	4.4	e
5 Dymind DP-H10	9	100.0	0.0	0.0	3.91	6.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Leucociti H2

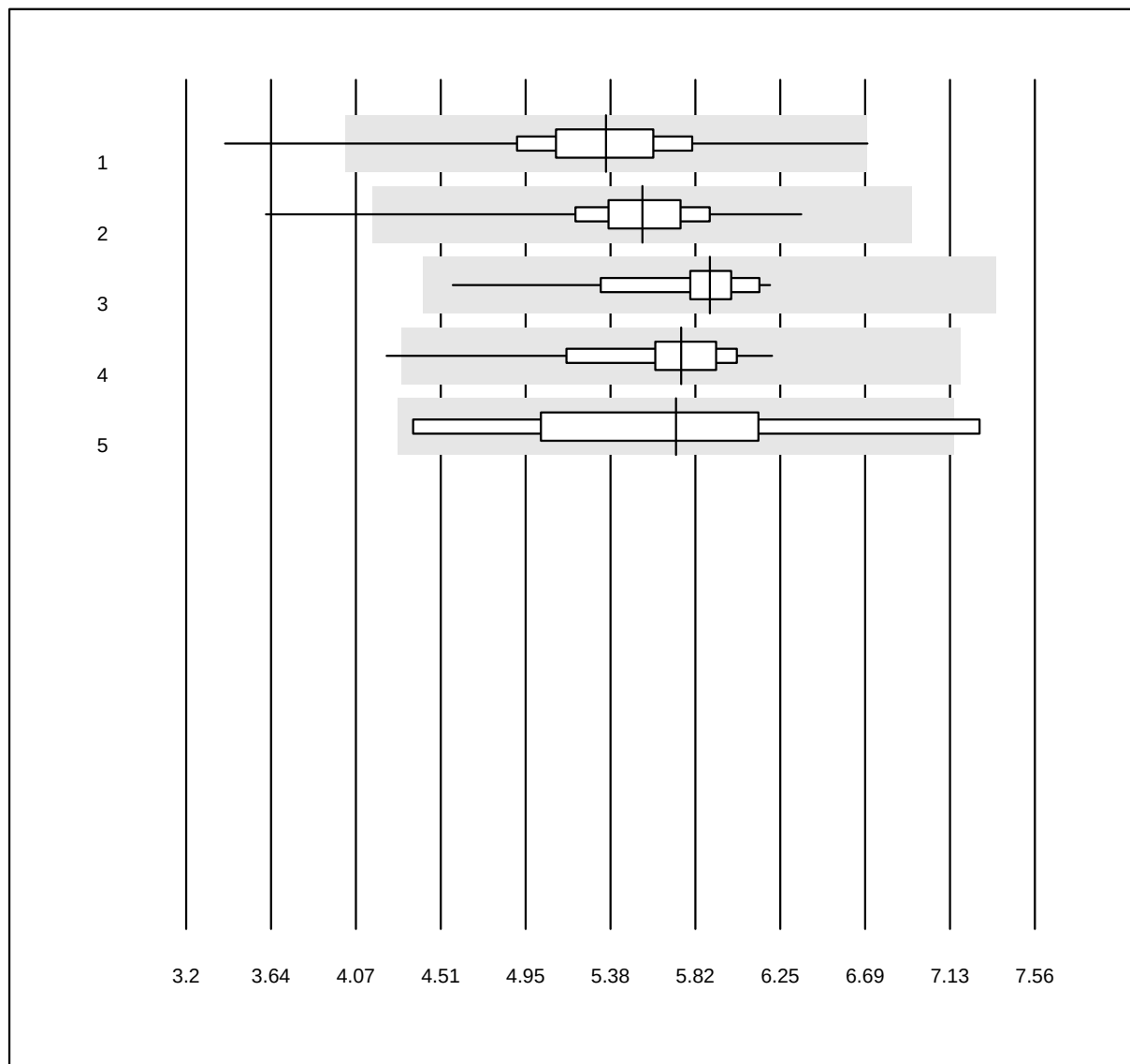


QUALAB Toleranz: 25%

Leucociti H2 (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	964	99.0	0.8	0.2	5.36	6.9	e
2 Zybio Z3	377	97.9	0.5	1.6	5.54	5.8	e
3 Nihon Kohden	30	100.0	0.0	0.0	5.89	6.6	e
4 MEK-1303/5	101	98.0	1.0	1.0	5.74	6.2	e
5 Dymind DP-H10	9	77.8	11.1	11.1	5.72	14.8	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Trombociti H2

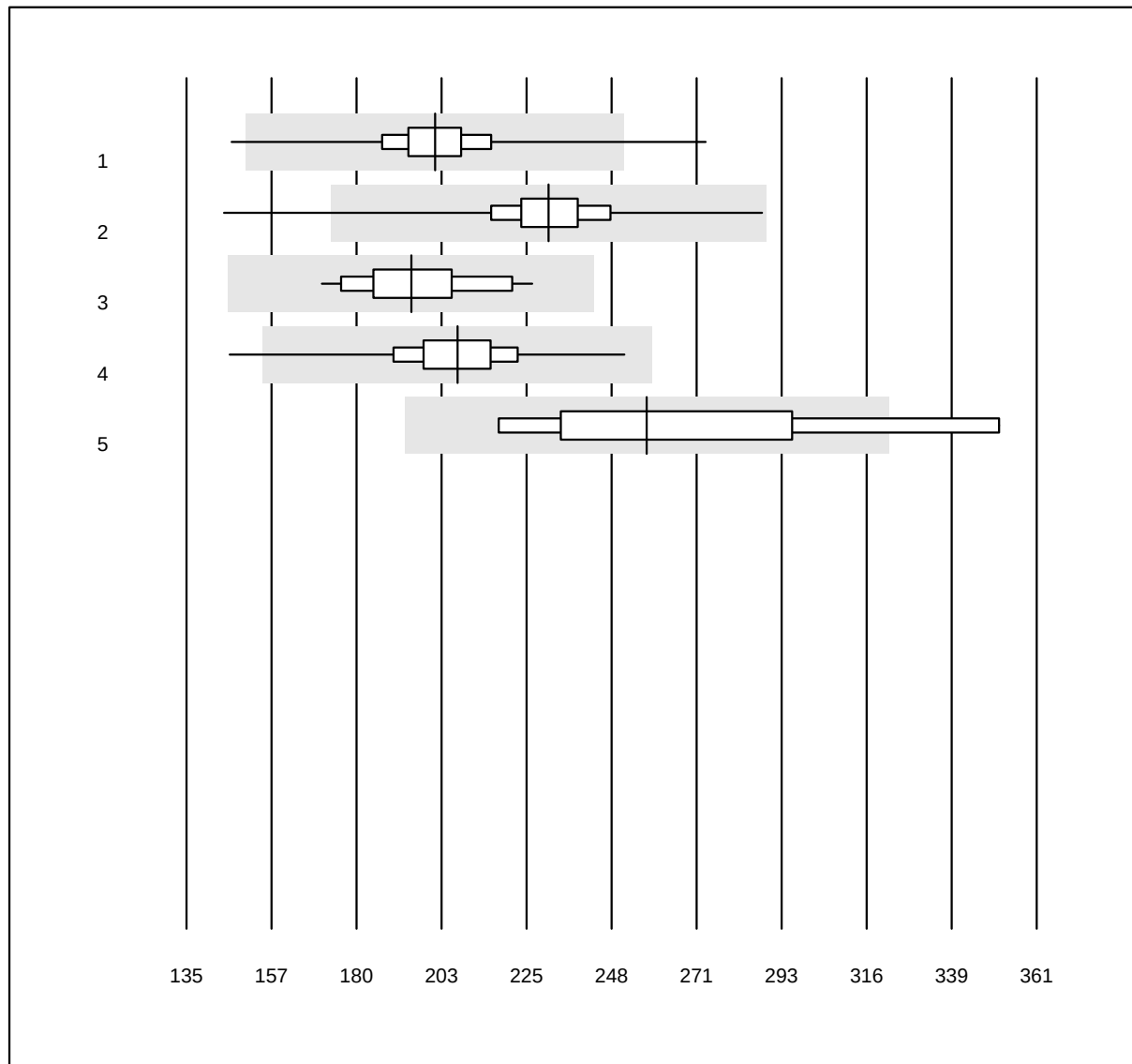


QUALAB Toleranz: 25%

Trombociti H2 (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	964	98.8	0.6	0.6	201.1	6.5	e
2 Zybio Z3	377	98.4	0.3	1.3	231.3	6.1	e
3 Nihon Kohden	30	100.0	0.0	0.0	194.8	8.0	e
4 MEK-1303/5	99	96.0	1.0	3.0	207.1	7.1	e
5 Dymind DP-H10	9	88.9	11.1	0.0	257.3	16.4	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CRP H2

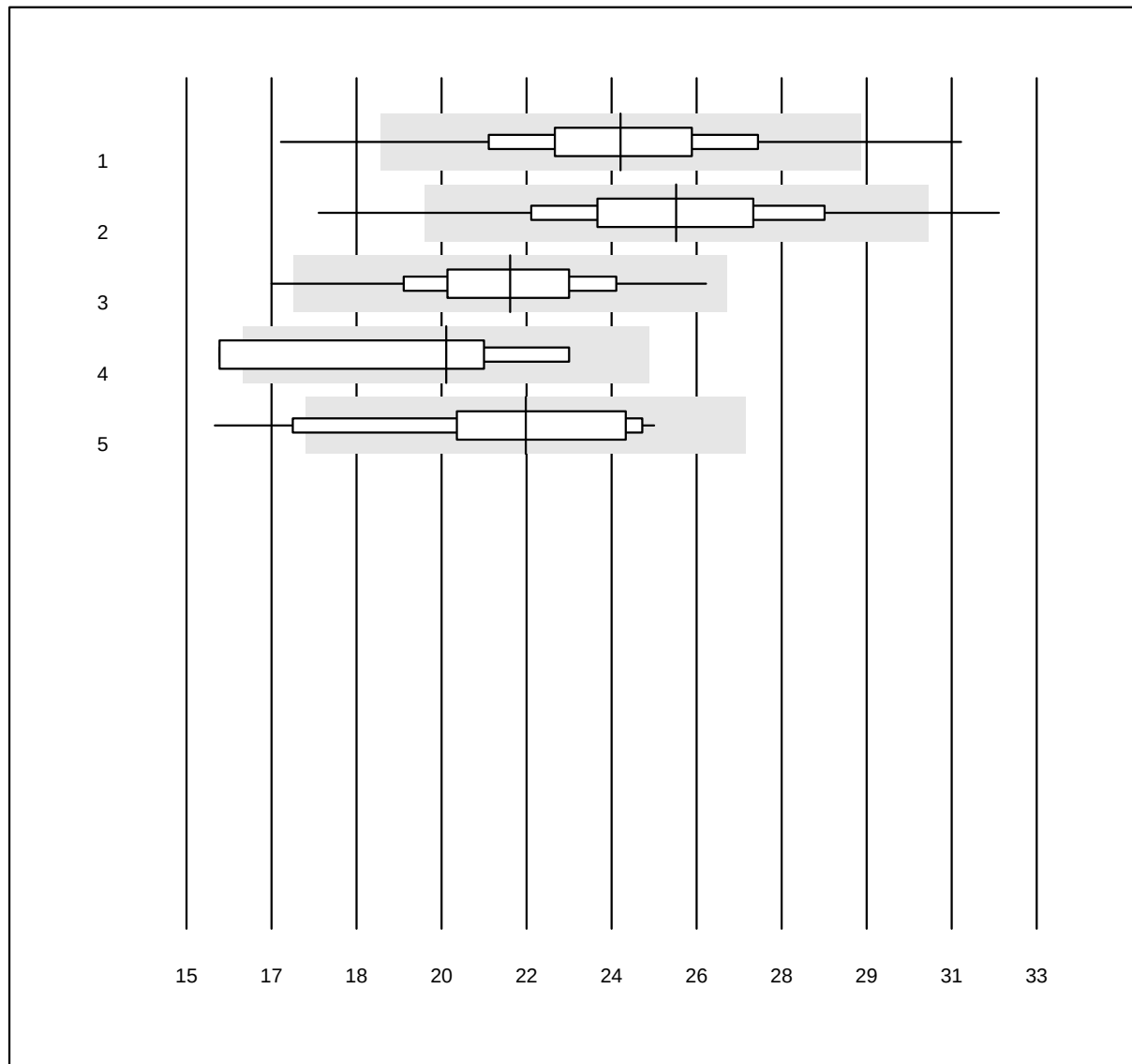


QUALAB Toleranz: 21%

CRP H2 (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Microsemi	951	95.3	2.9	1.8	24.2	9.4	e
2 Zybio Z3	352	95.5	3.4	1.1	25.4	9.6	e
3 MEK-1303/5	89	97.8	1.1	1.1	21.9	8.2	e
4 Dymind DP-H10	8	62.5	25.0	12.5	20.5	14.2	e*
5 Celltac chemi	14	92.9	7.1	0.0	22.2	12.0	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Parassiti ematici

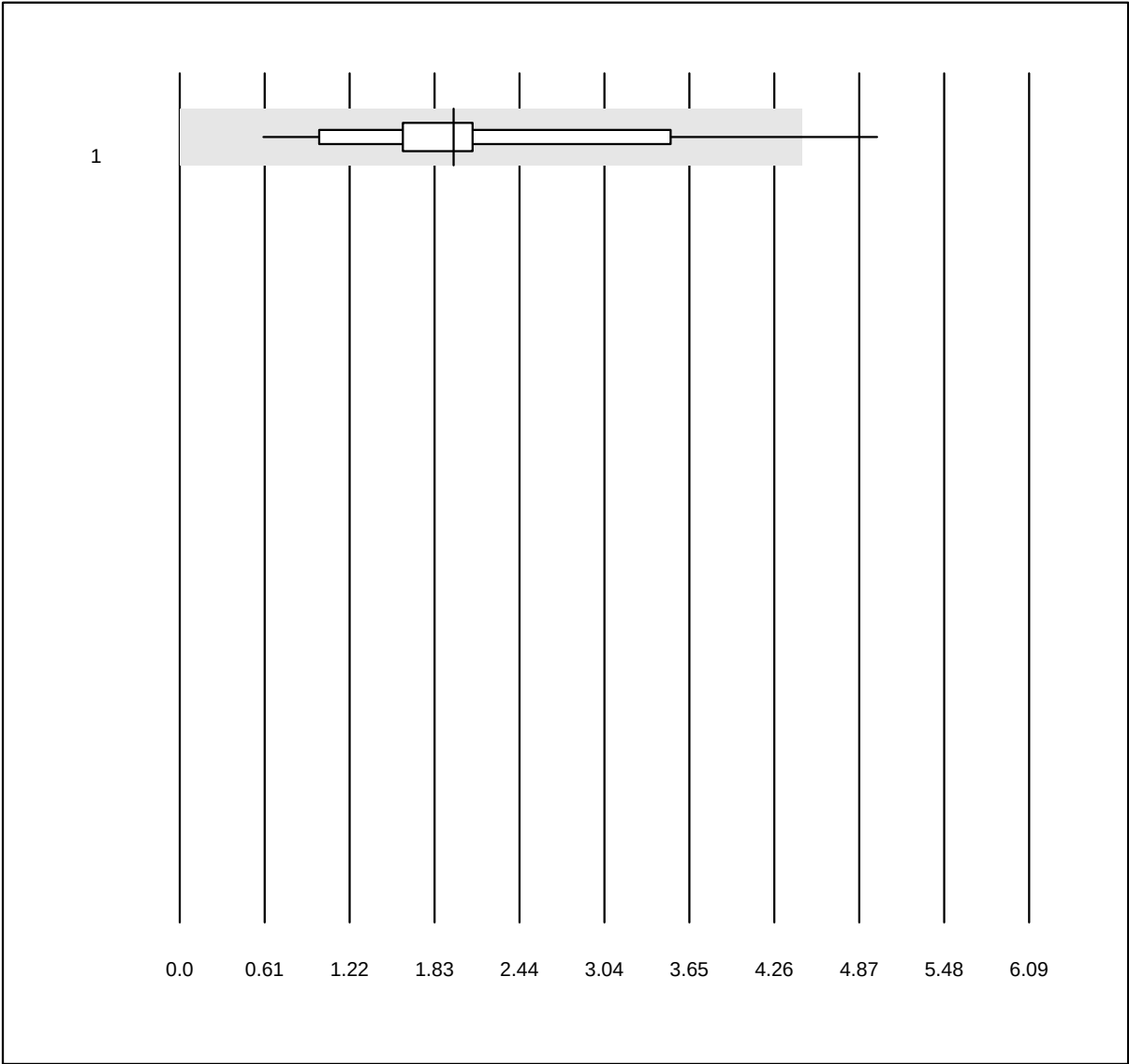


QUALAB Toleranz: 100%
(< 5.0: +/- 2.5 %)

Parassiti ematici (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Parassitemia	27	96.3	3.7	0.0	2.0	45.6	e

Emoglobina BG

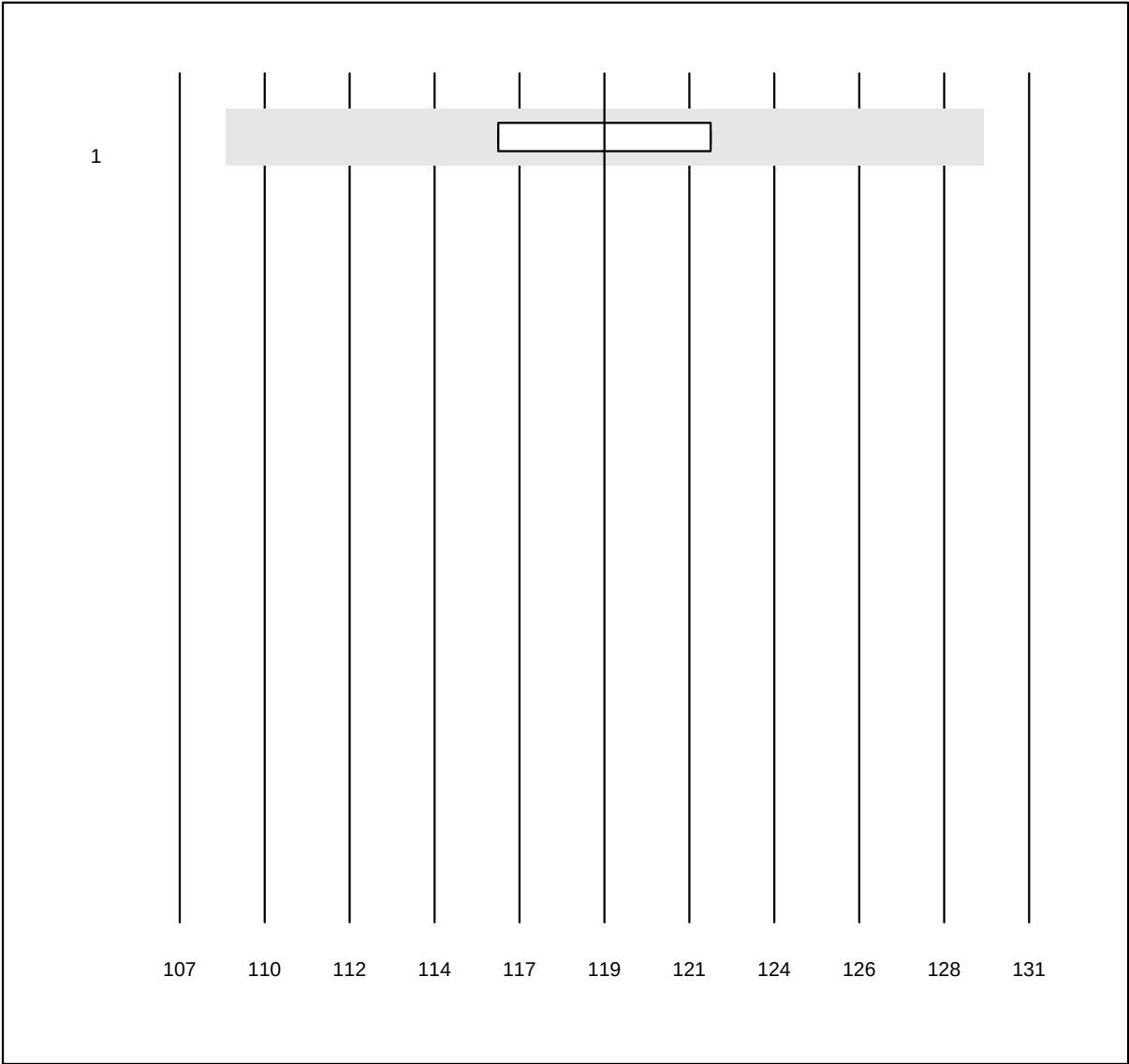


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	iStat	15	100.0	0.0	0.0	119.0	1.9	e

Ematocrito

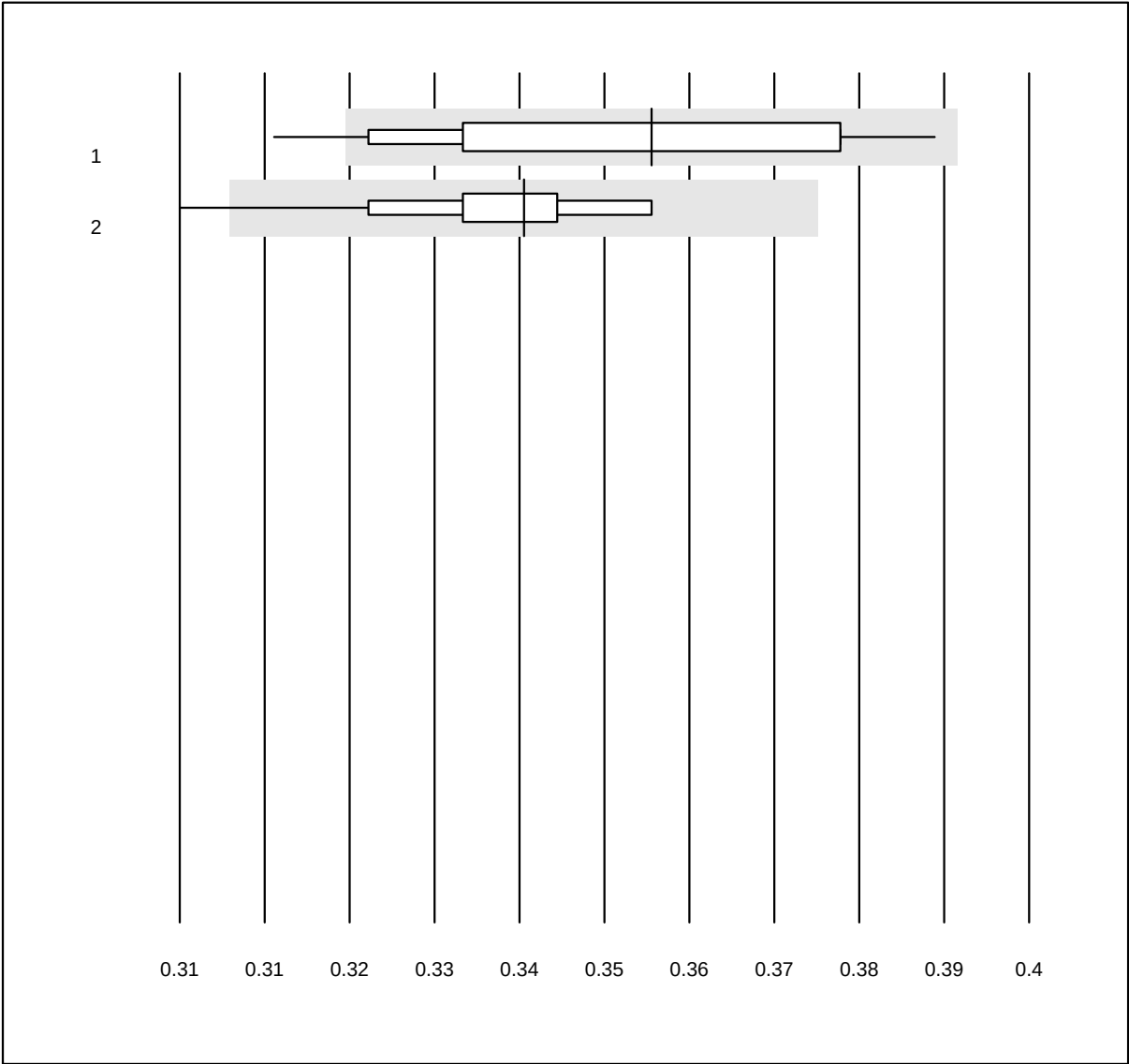


QUALAB Toleranz: 9%

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 EPOC	22	95.5	4.5	0.0	0.36	6.3	a*
2 iStat	20	95.0	5.0	0.0	0.35	3.6	e

Emoglobina

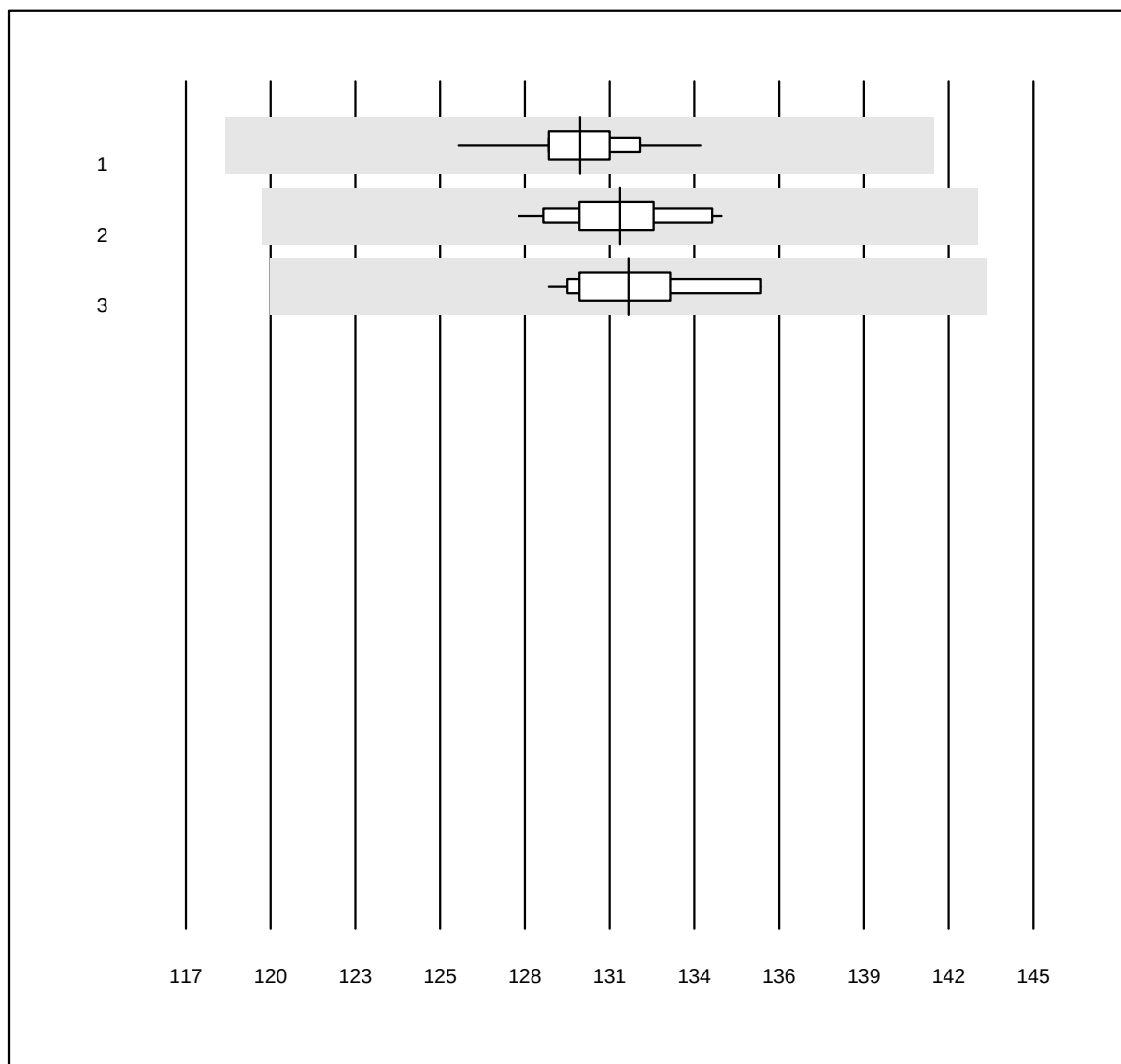


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	99.3	0.0	0.7	130.0	0.9	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	131.3	1.4	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	131.6	1.6	e

Ematocrito

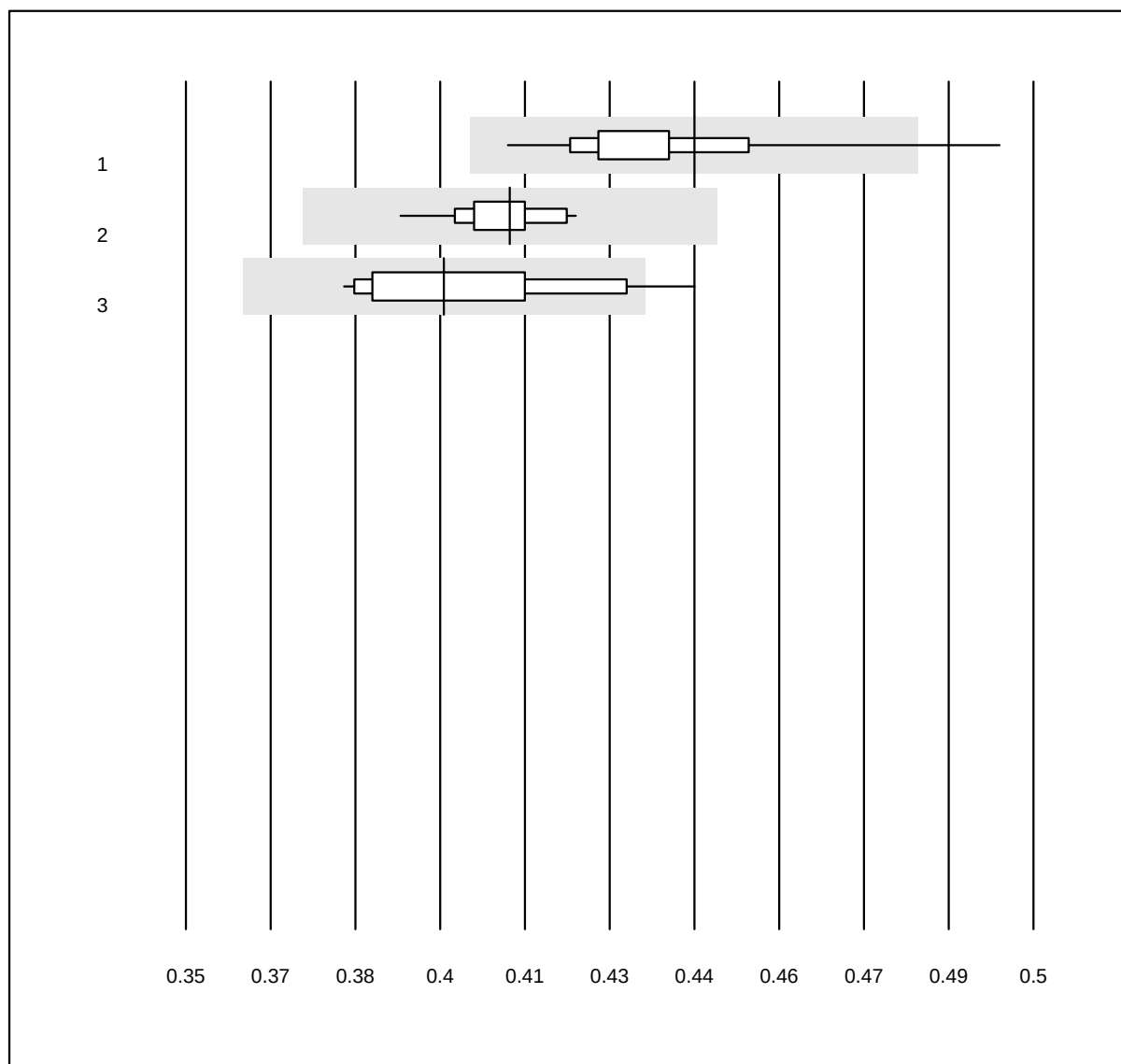


QUALAB Toleranz: 9%

Ematocrito (l/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	97.9	1.4	0.7	0.44	3.3	a
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.41	1.8	e
3 Yumizen/Pentra	15	93.3	6.7	0.0	0.40	4.3	e*

Eritrociti

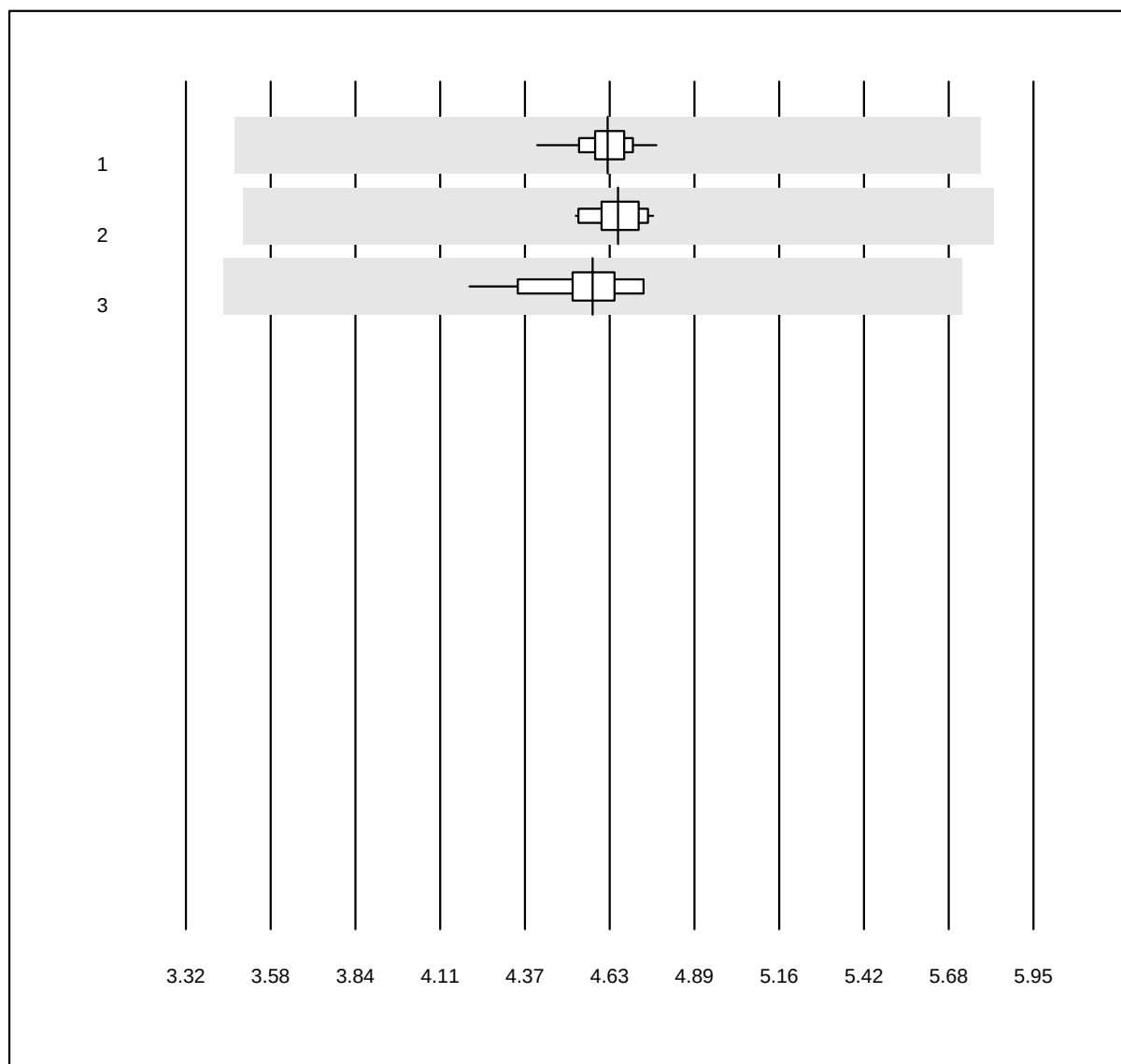


QUALAB Toleranz: 25%

Eritrociti (T/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	4.63	1.4	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	4.66	1.6	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	4.58	3.0	e

Leucociti

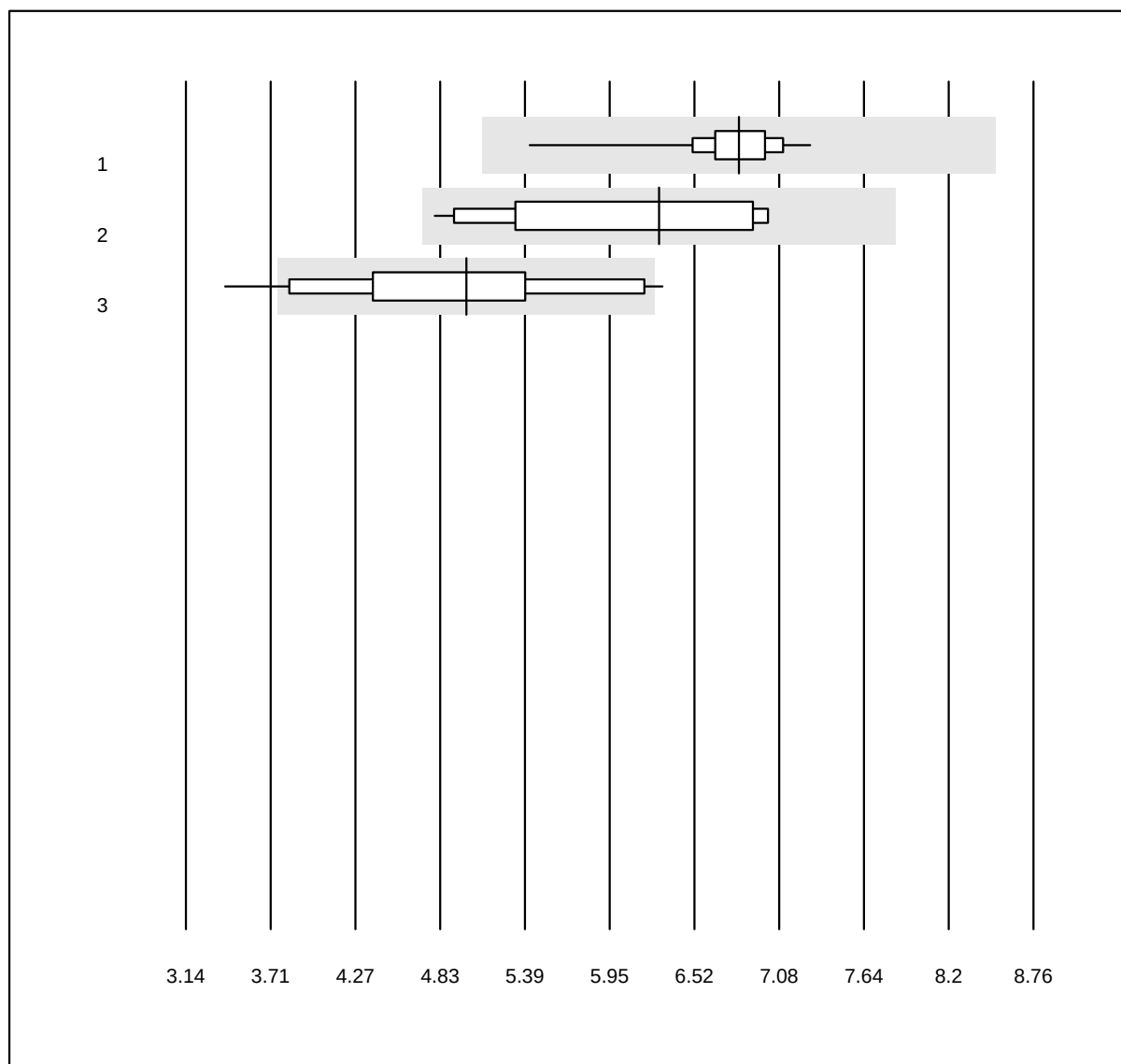


QUALAB Toleranz: 25%

Leucociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	141	100.0	0.0	0.0	6.81	4.0	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	6.28	12.5	e*
3 Yumizen/Pentra	16	81.2	12.5	6.2	5.00	15.5	a*

Trombociti

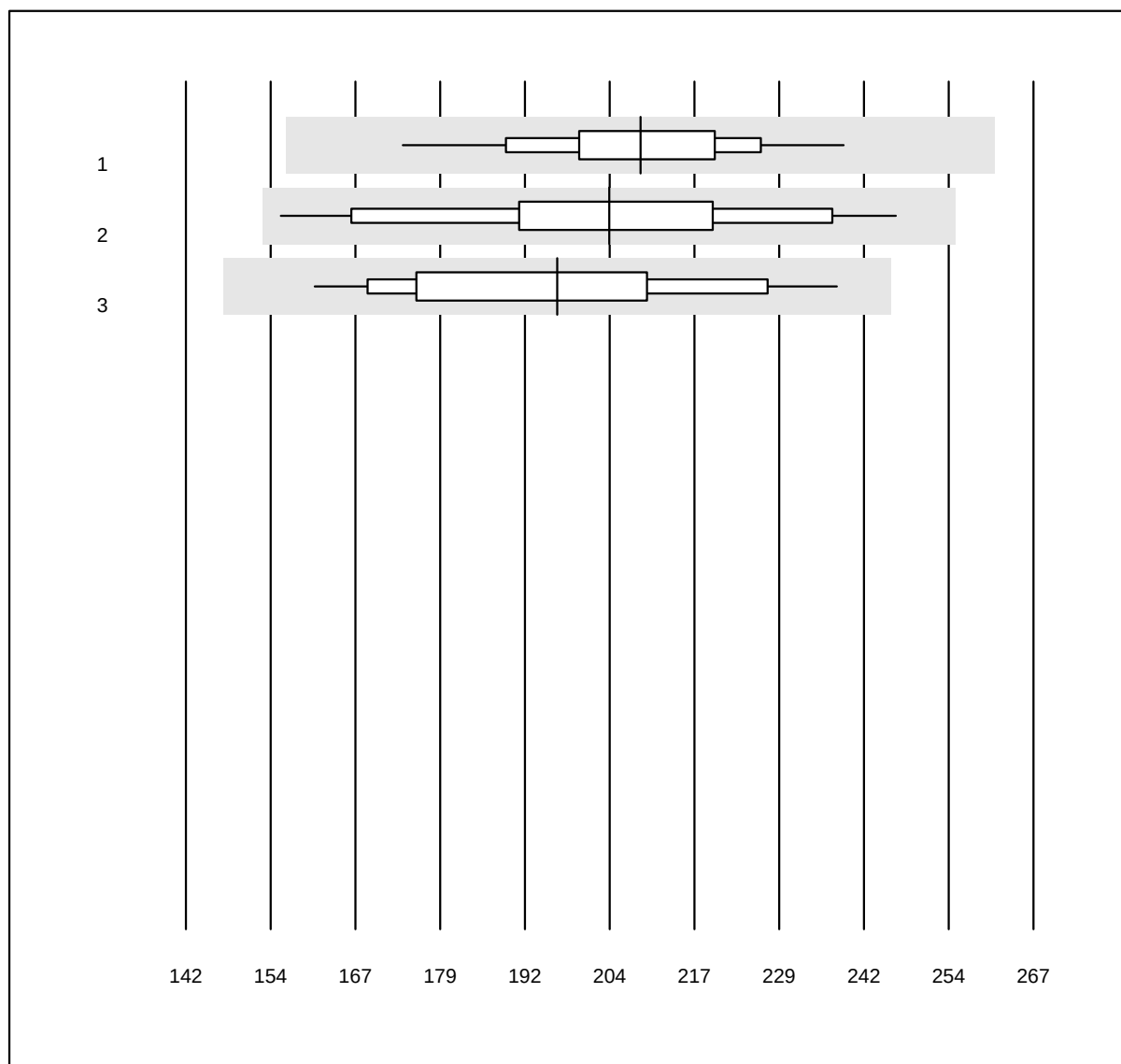


QUALAB Toleranz: 25%

Trombociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	141	100.0	0.0	0.0	209.1	6.8	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	204.4	11.5	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	196.8	10.5	e

Neutrofili

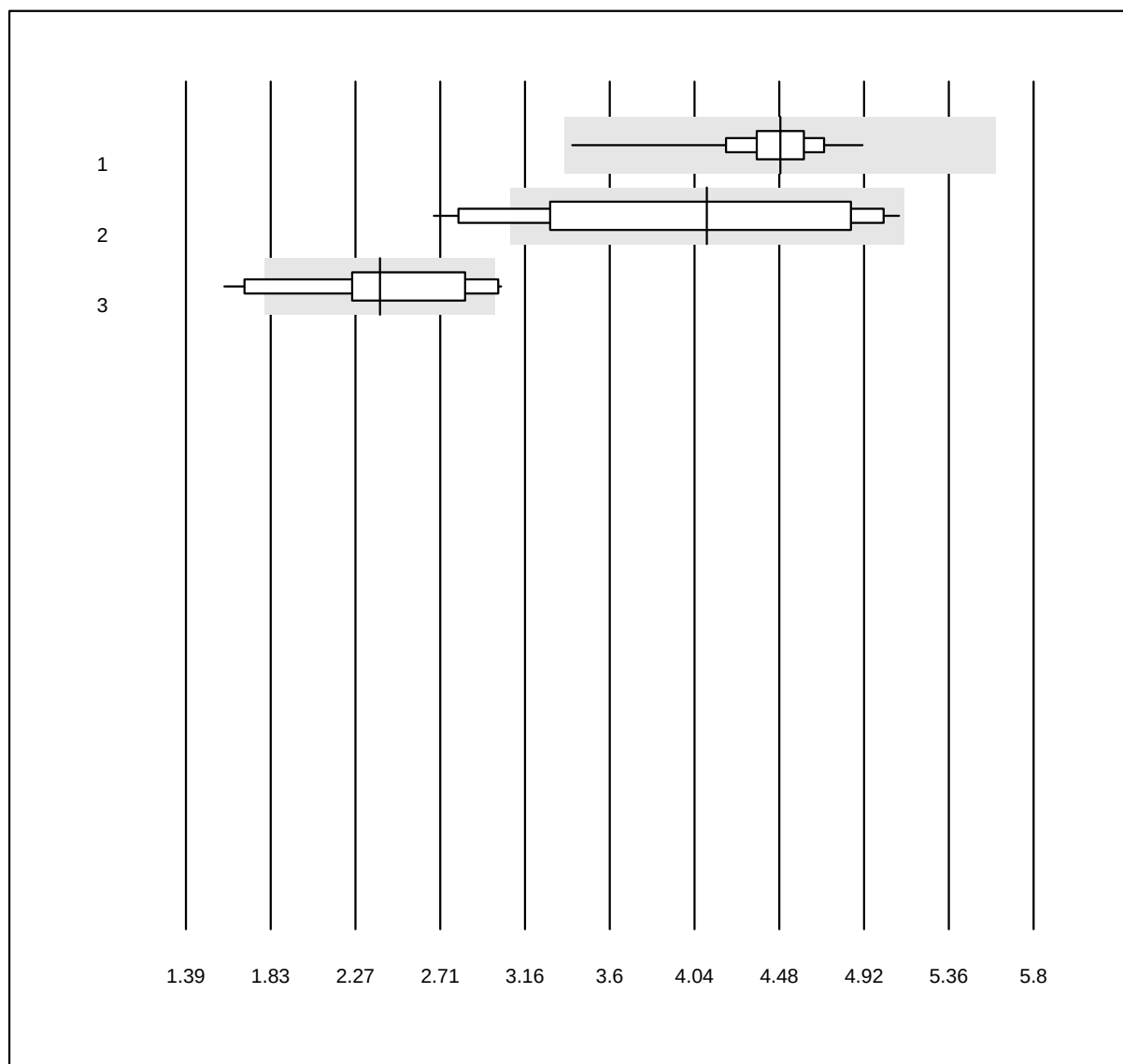


MQ Tolleranz: 25%

Neutrofili (G/l)


No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	4.48	5.5	e
2 Beckman	17	88.2	11.8	0.0	4.10	19.6	a*
3 Yumizen/Pentra	15	73.3	20.0	6.7	2.40	17.5	e*

Linfociti

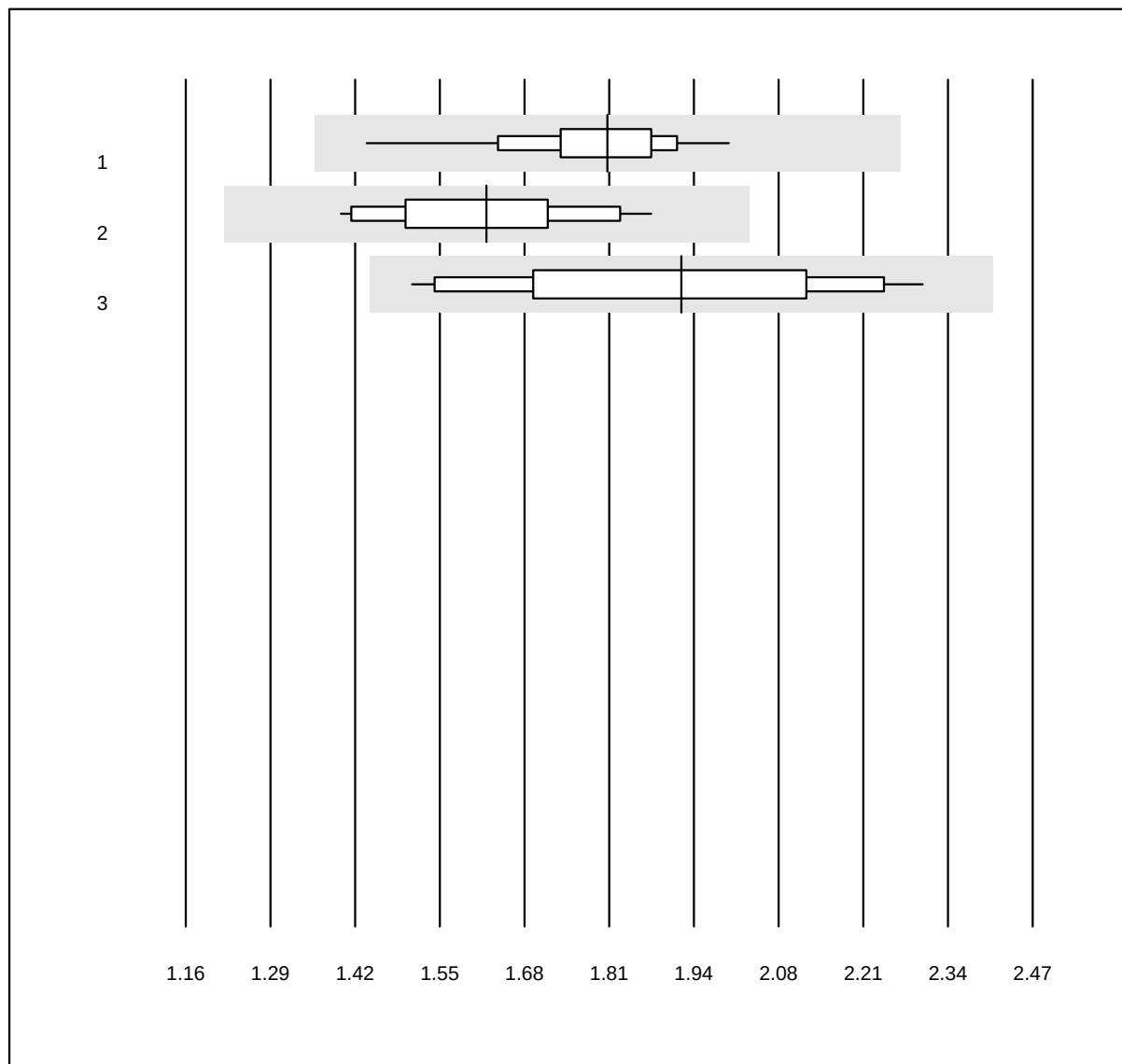

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	1.81	6.0	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	1.63	8.8	e
3 Yumizen/Pentra	15	93.3	0.0	6.7	1.93	12.9	e*

Monociti

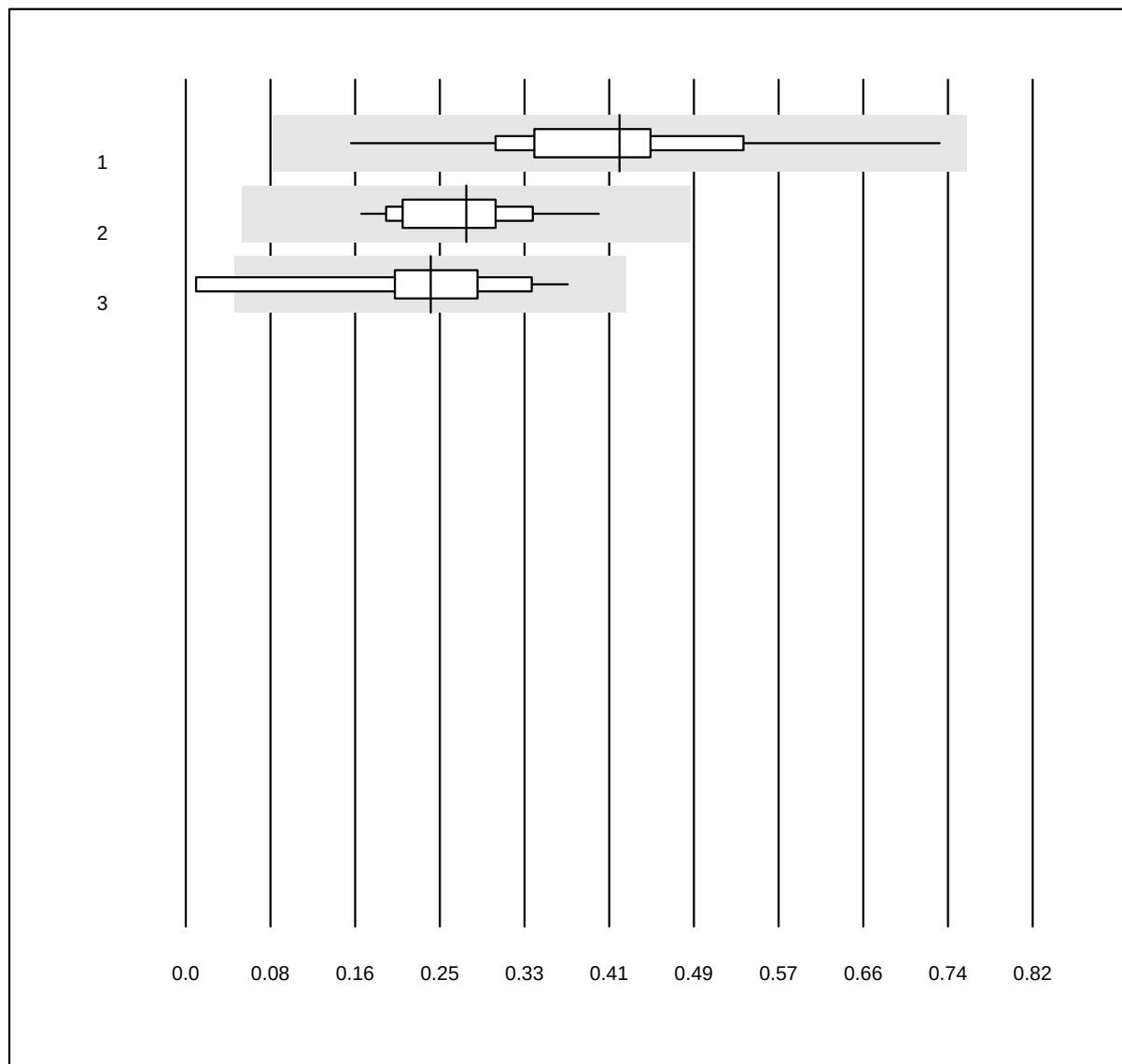


MQ Tolleranz: 80%

Monociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	142	100.0	0.0	0.0	0.42	24.4	a
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.27	21.8	e
3 Yumizen/Pentra	14	85.7	14.3	0.0	0.24	46.2	e*

Eosinofili

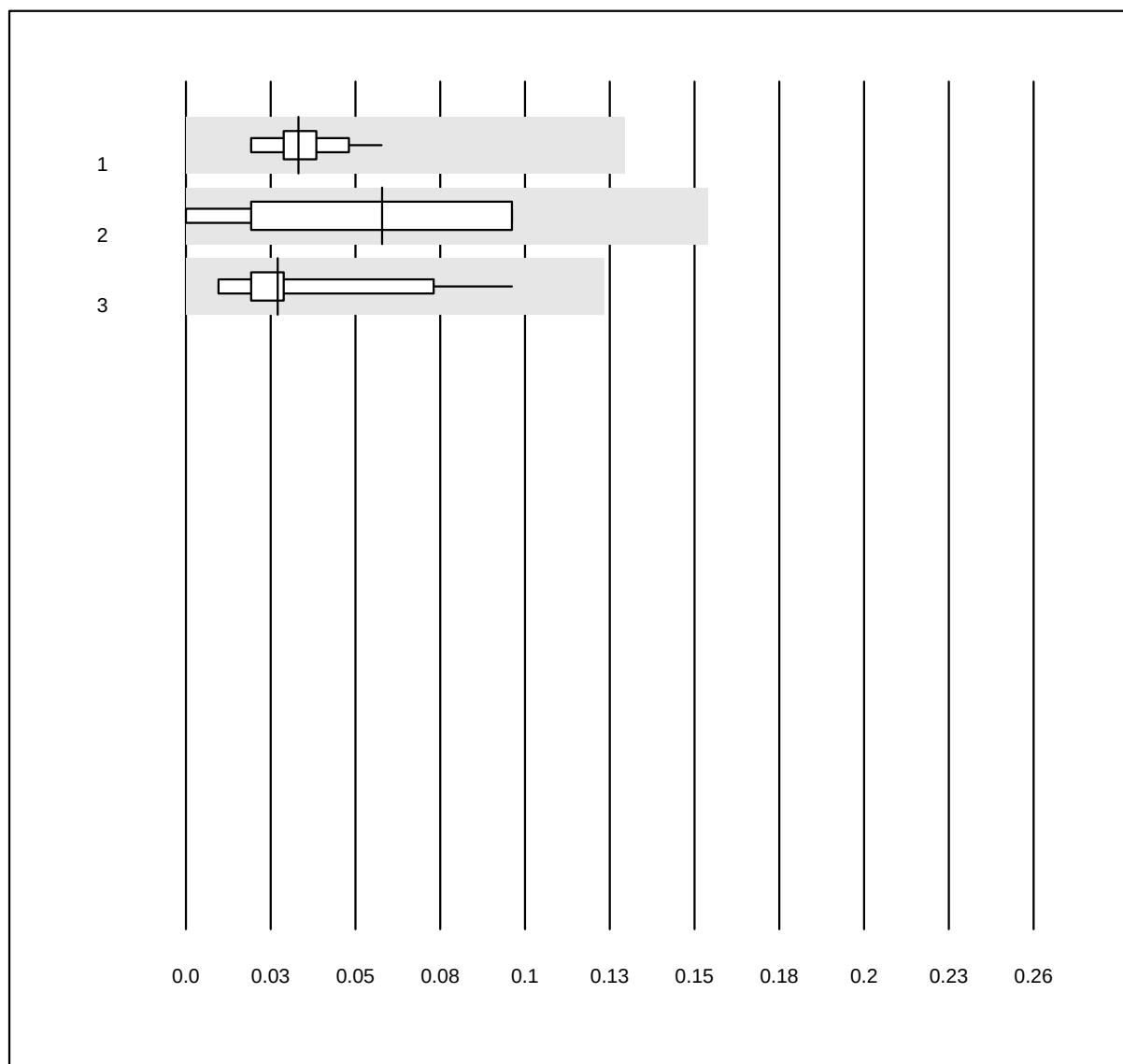


MQ Toleranz: 80%
(< 0.13: +/- 0.1 G/l)

Eosinofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	139	99.3	0.0	0.7	0.03	31.0	e
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.06	65.8	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	0.03	72.0	e

Basofili

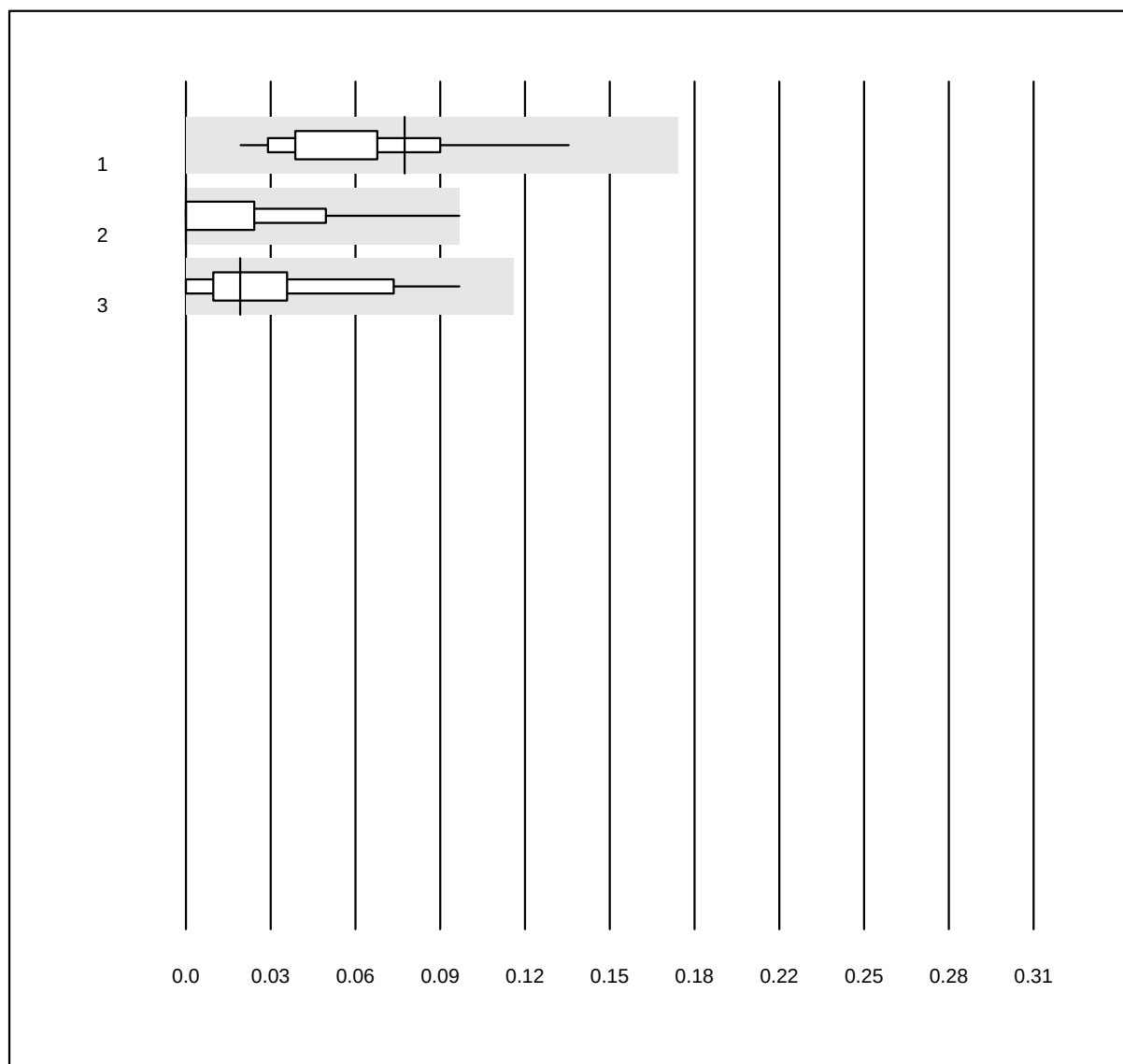


MQ Toleranz: 80%
(< 0.13: +/- 0.1 G/l)

Basofili (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	139	97.8	0.0	2.2	0.08	46.0	a
2 Beckman	17	100.0	0.0	0.0	0.00	172.3	e
3 Yumizen/Pentra	15	100.0	0.0	0.0	0.02	114.9	e

Granulociti immaturi

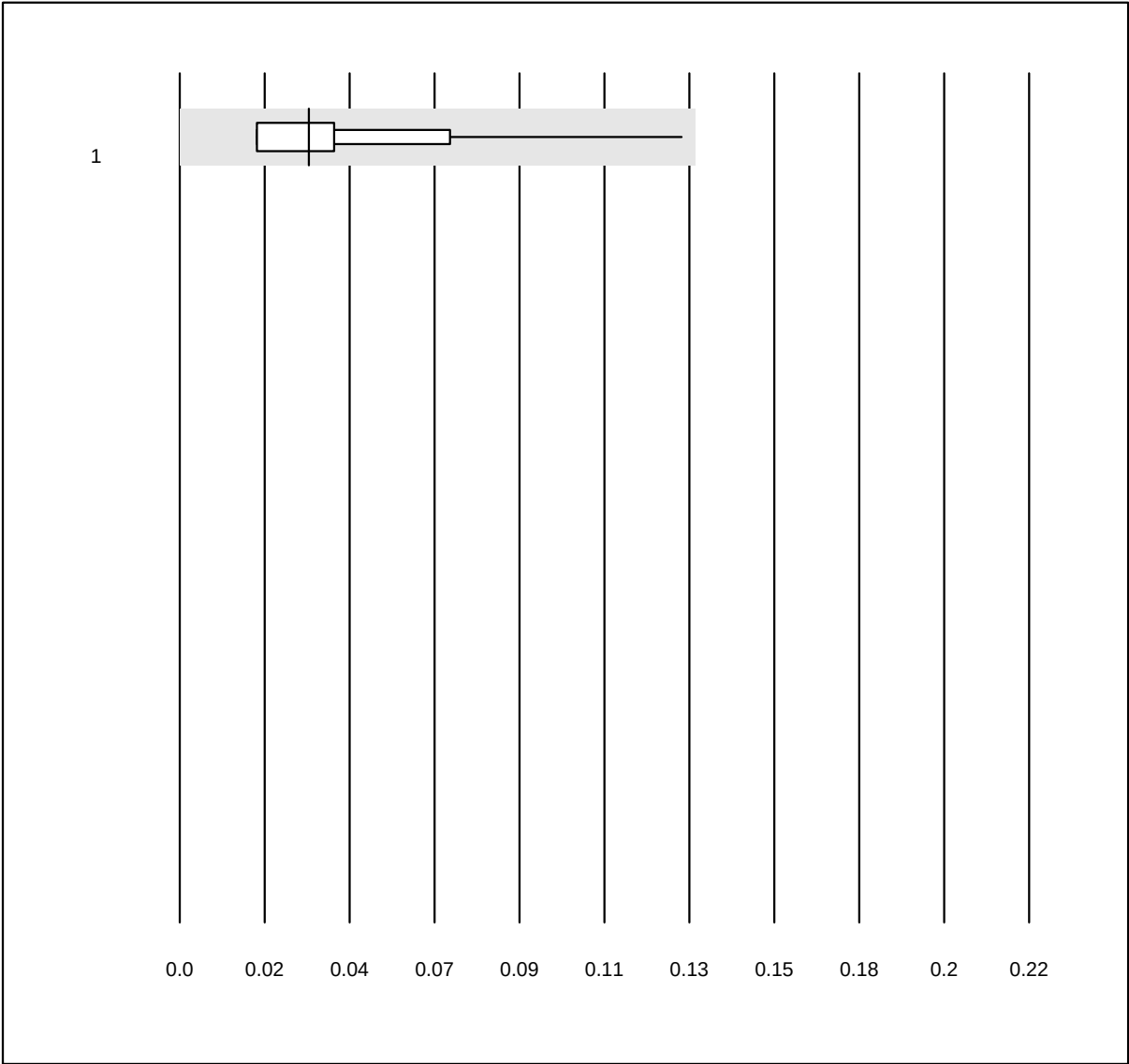


MQ Toleranz: 25%
(< 1.3: +/- 0.1 G/l)

Granulociti immaturi (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	128	99.2	0.0	0.8	0.03	57.0	e

MCV

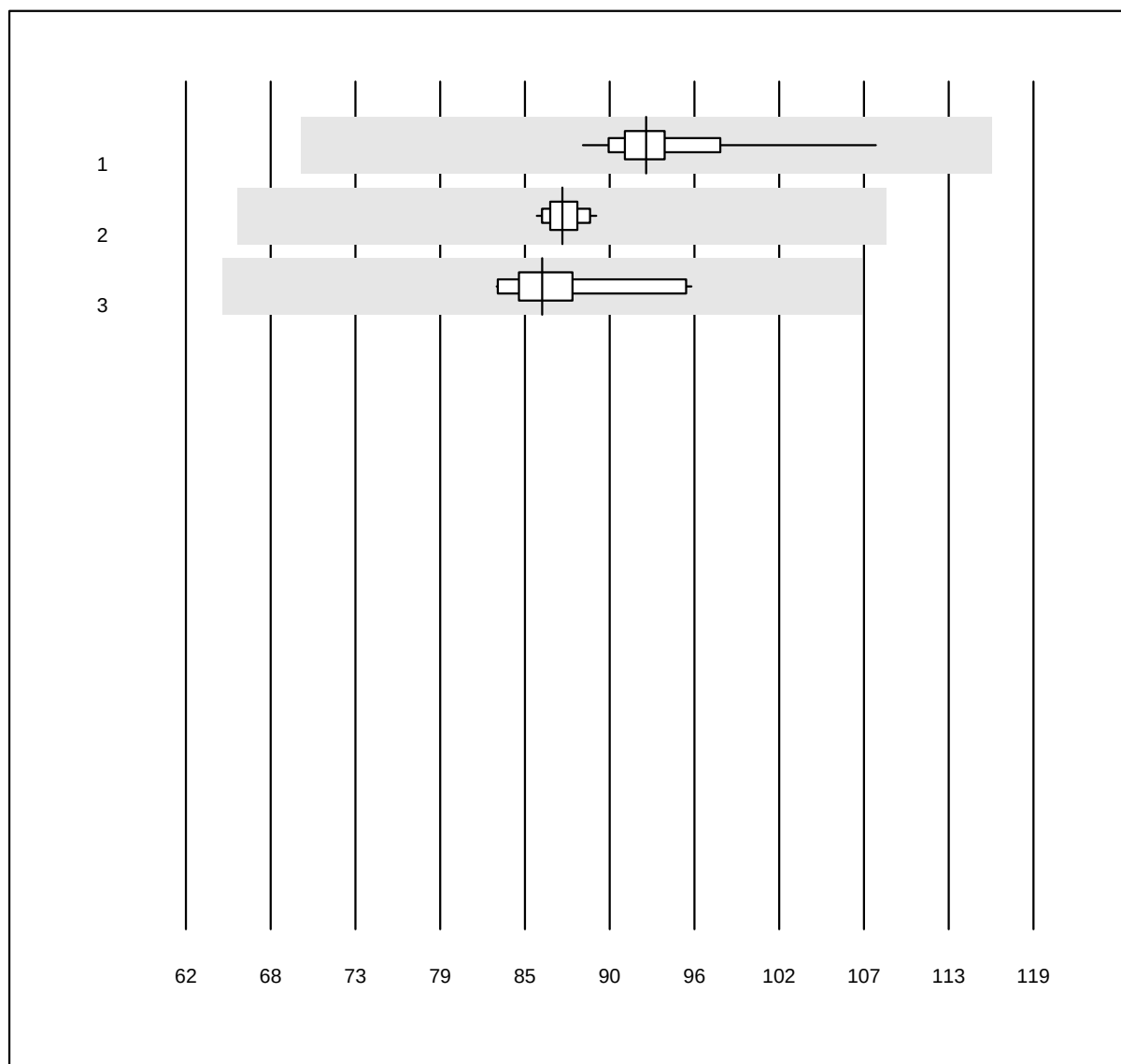


MQ Tolleranz: 25%

MCV (fl)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	132	100.0	0.0	0.0	93.0	3.6	e
2 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	87.3	1.3	e
3 Yumizen/Pentra	11	100.0	0.0	0.0	86.0	4.9	e

MCH

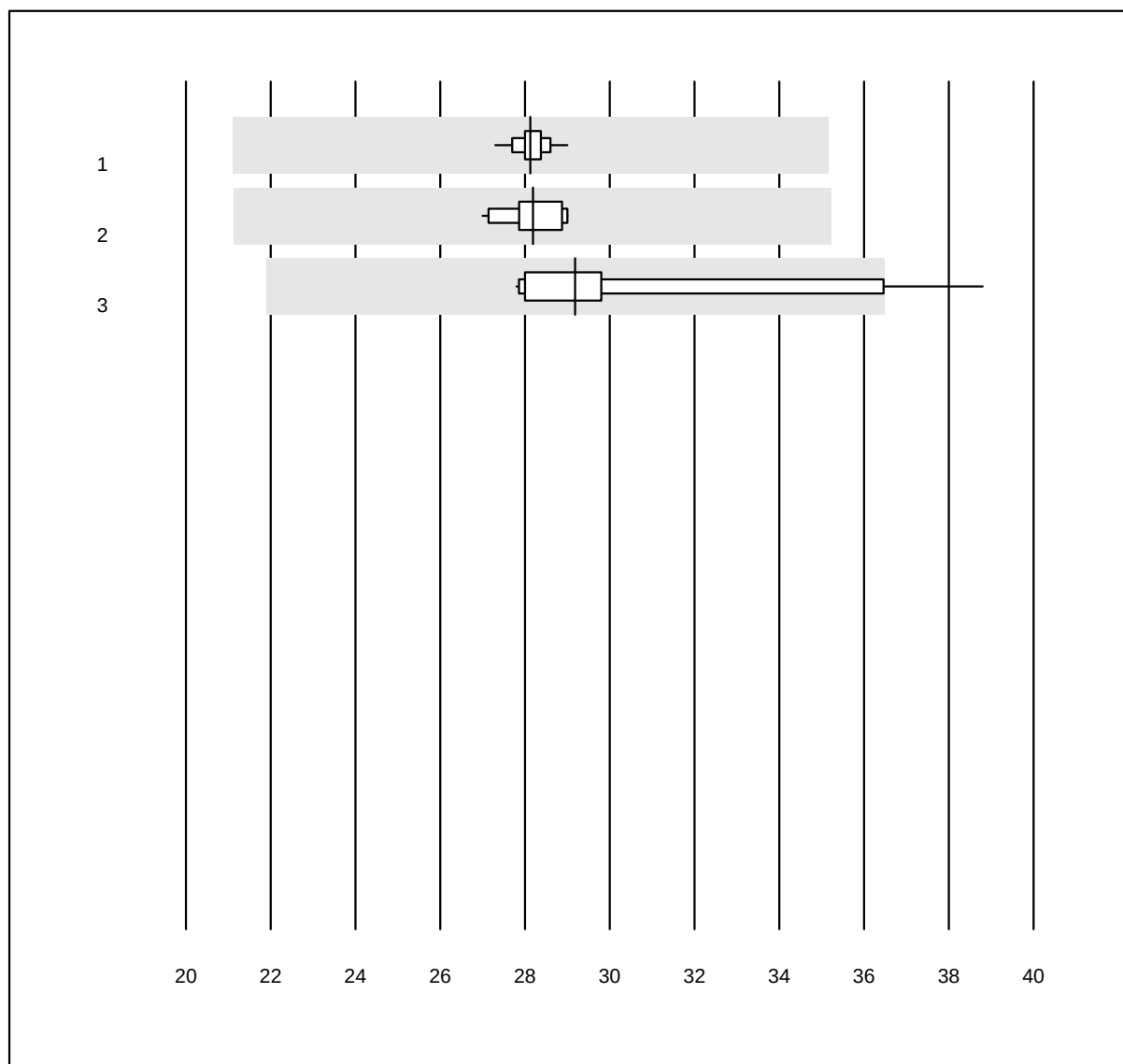


MQ Toleranz: 25%

MCH (pg)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	132	100.0	0.0	0.0	28.1	1.3	e
2 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	28.2	2.2	e
3 Yumizen/Pentra	12	91.7	8.3	0.0	29.2	10.0	e


MCHC

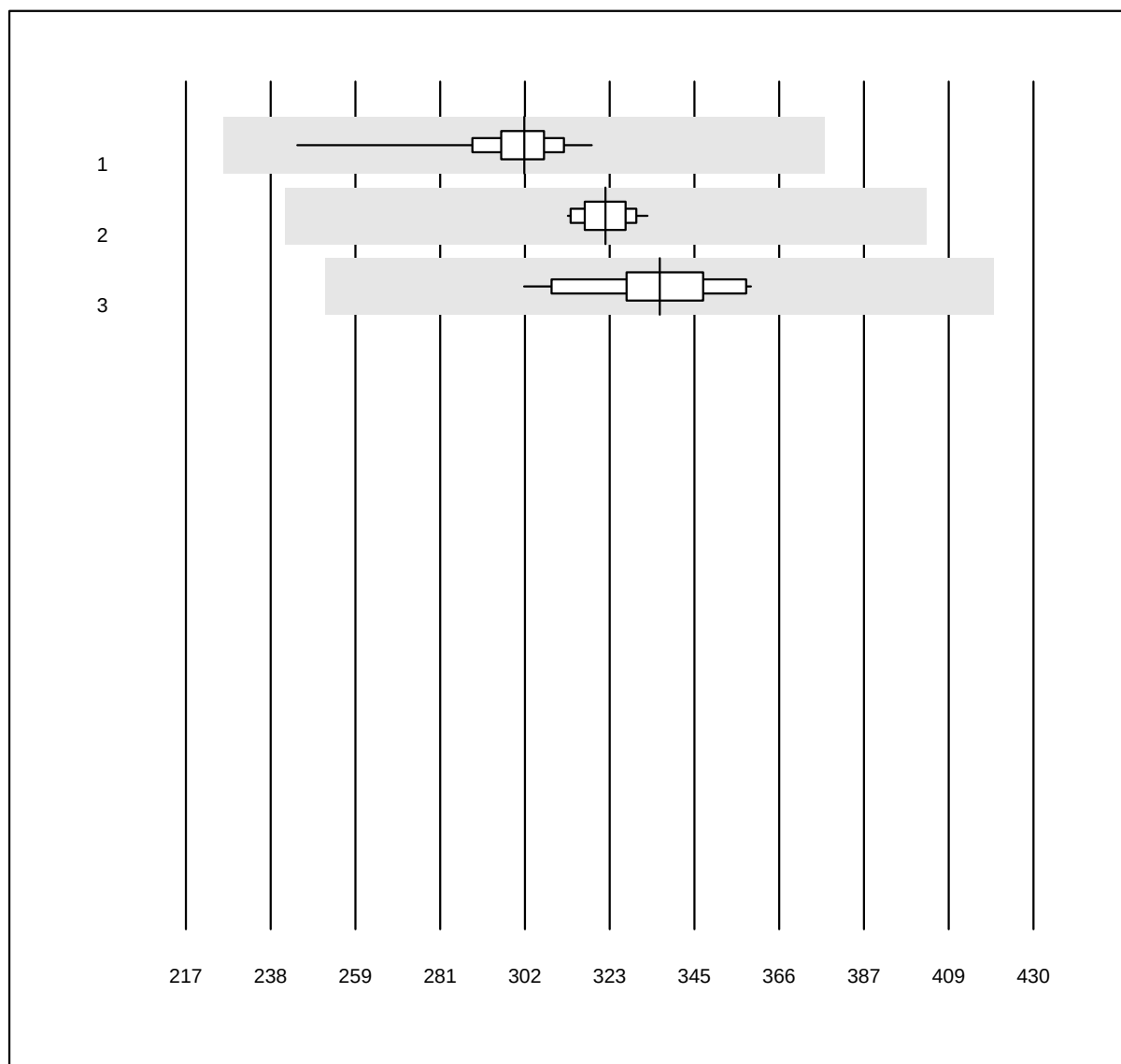

MQ Tolleranz: 25%

MCHC (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	133	99.2	0.0	0.8	302	3.7	e
2 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	322	1.8	e
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	336	4.6	e

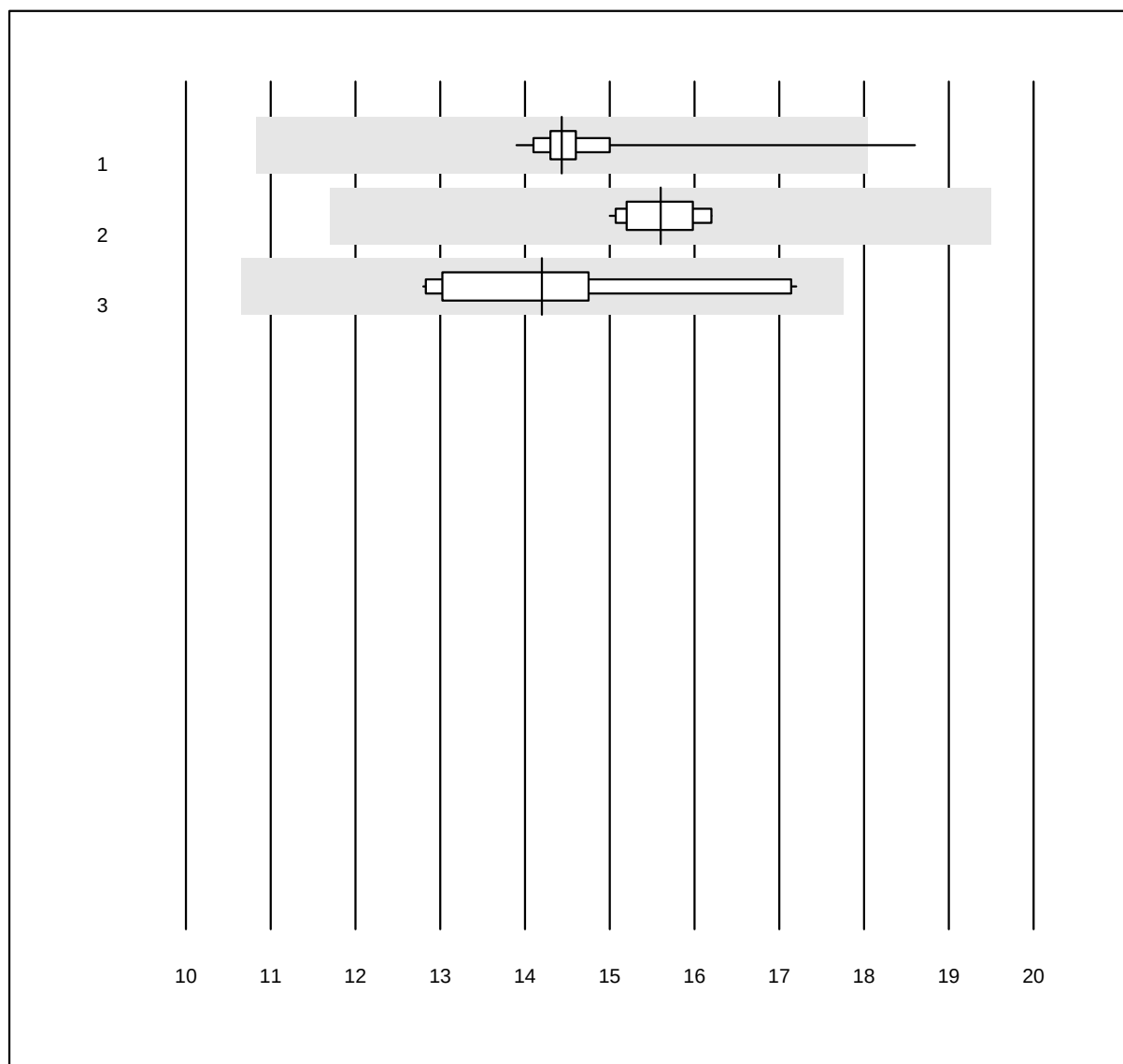
RDW

MQ Toleranz: 25%

RDW (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	127	98.4	0.8	0.8	14.4	3.4	e
2 Beckman	16	100.0	0.0	0.0	15.6	2.7	e
3 Yumizen/Pentra	12	100.0	0.0	0.0	14.2	10.2	e

Reticolociti

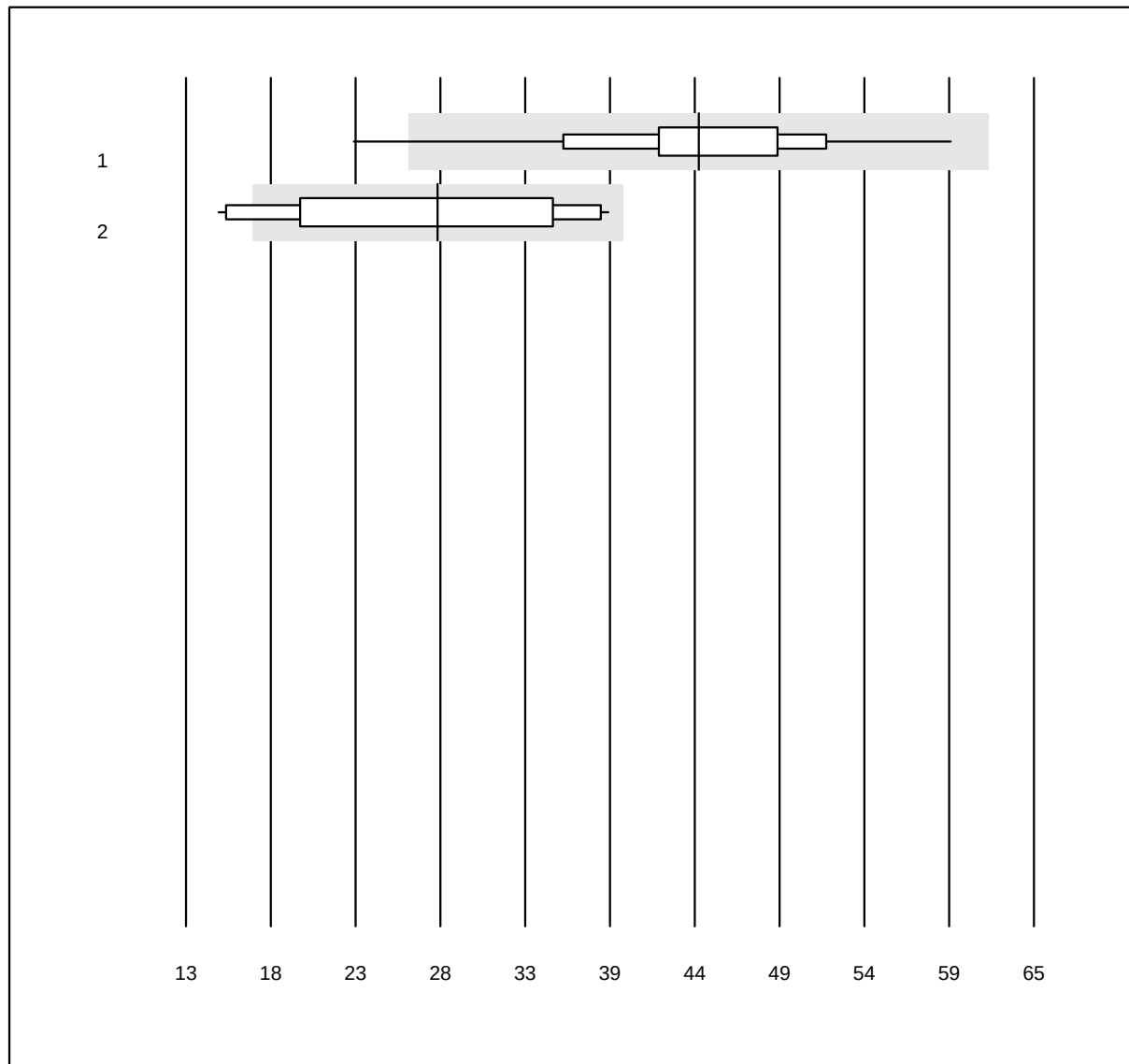


QUALAB Toleranz: 30%

Reticolociti (G/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sysmex	77	97.4	1.3	1.3	44.5	14.9	a
2 Beckman	11	90.9	9.1	0.0	28.4	28.6	a*

Indice emolitico A

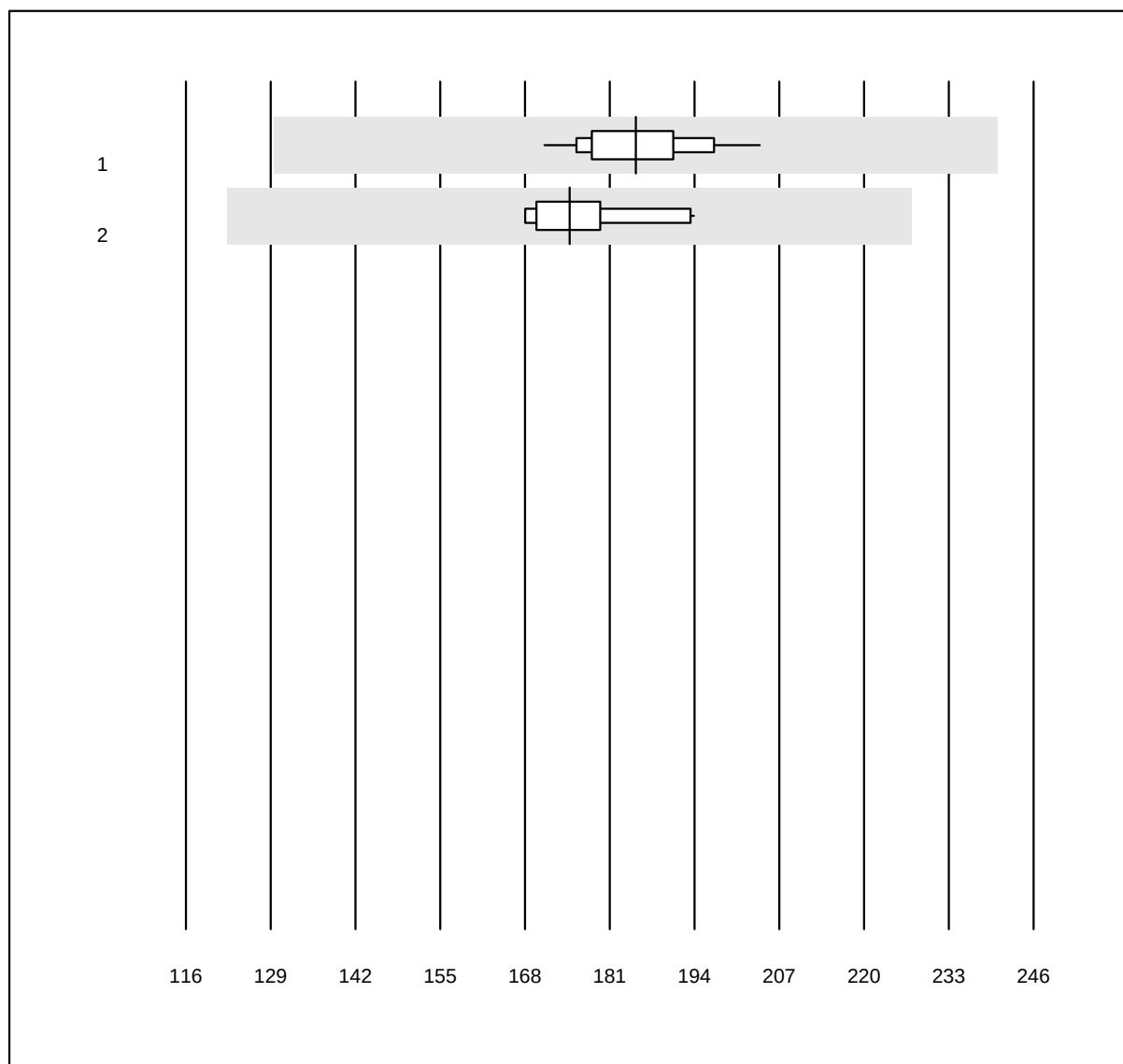


MQ Toleranz: 30%

Indice emolitico A ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	28	100.0	0.0	0.0	185.00	4.5	e
2 Atellica	10	100.0	0.0	0.0	174.86	4.9	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice emolitico B

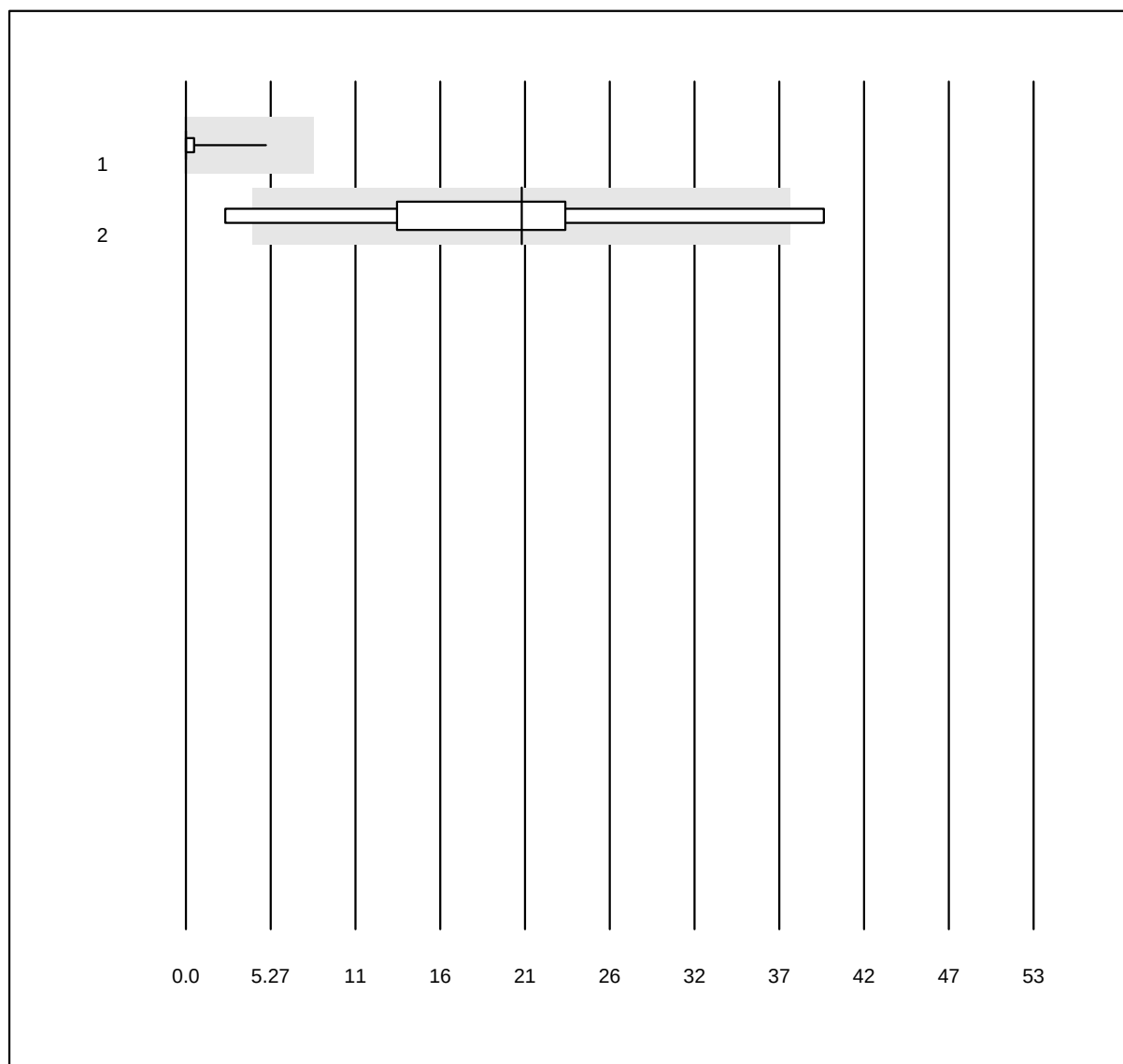


MQ Toleranz: 30%
(< 20.0: +/- 8.0)

Indice emolitico B ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	28	100.0	0.0	0.0	0.00	366.0	e
2 Atellica	10	70.0	0.0	30.0	21.00	56.4	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice itterico A

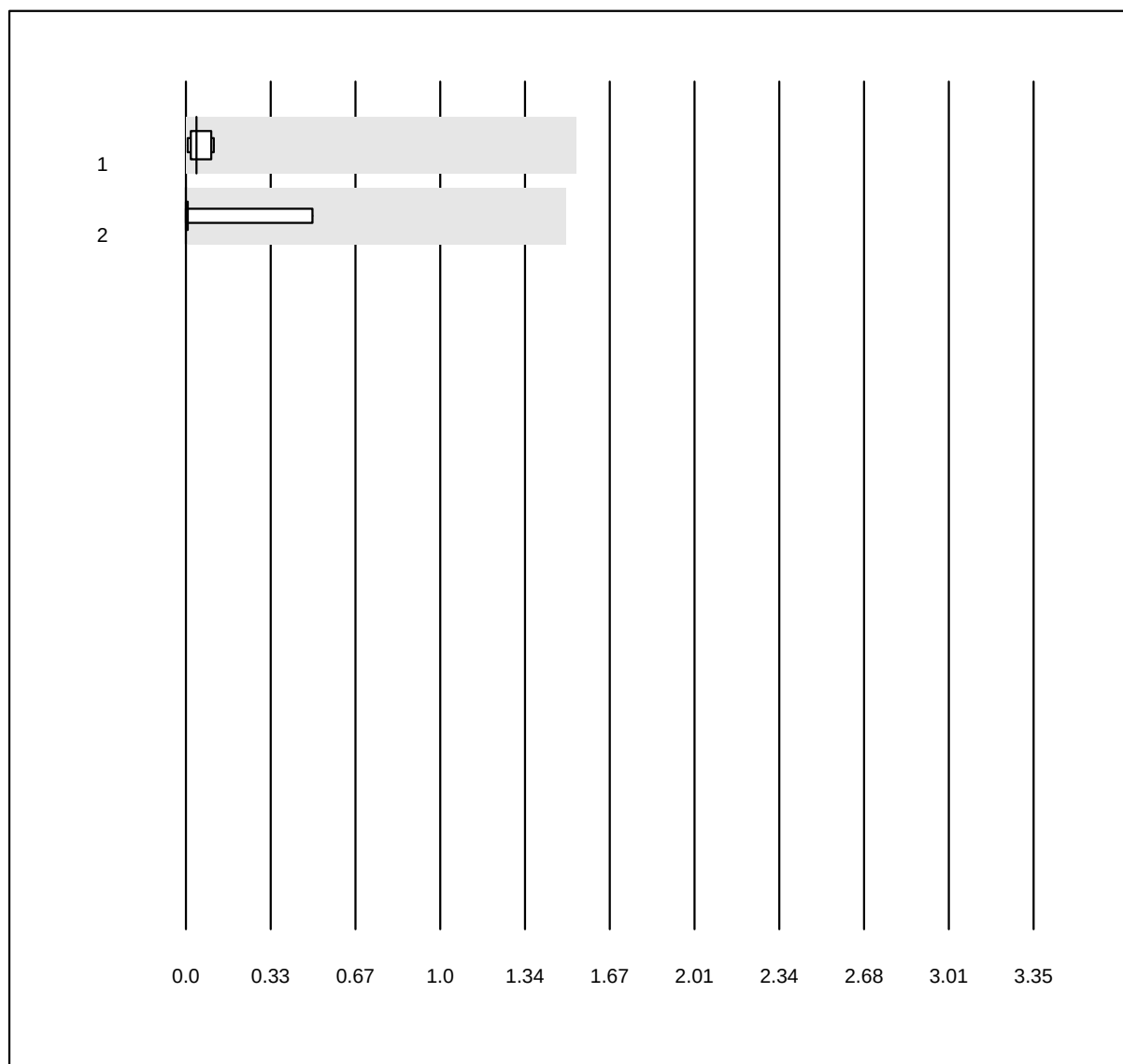


MQ Toleranz: 30%
(< 5.0: +/- 1.5)

Indice itterico A ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Atellica	9	100.0	0.0	0.0	0.04	73.8	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	0.00	267.2	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice itterico B

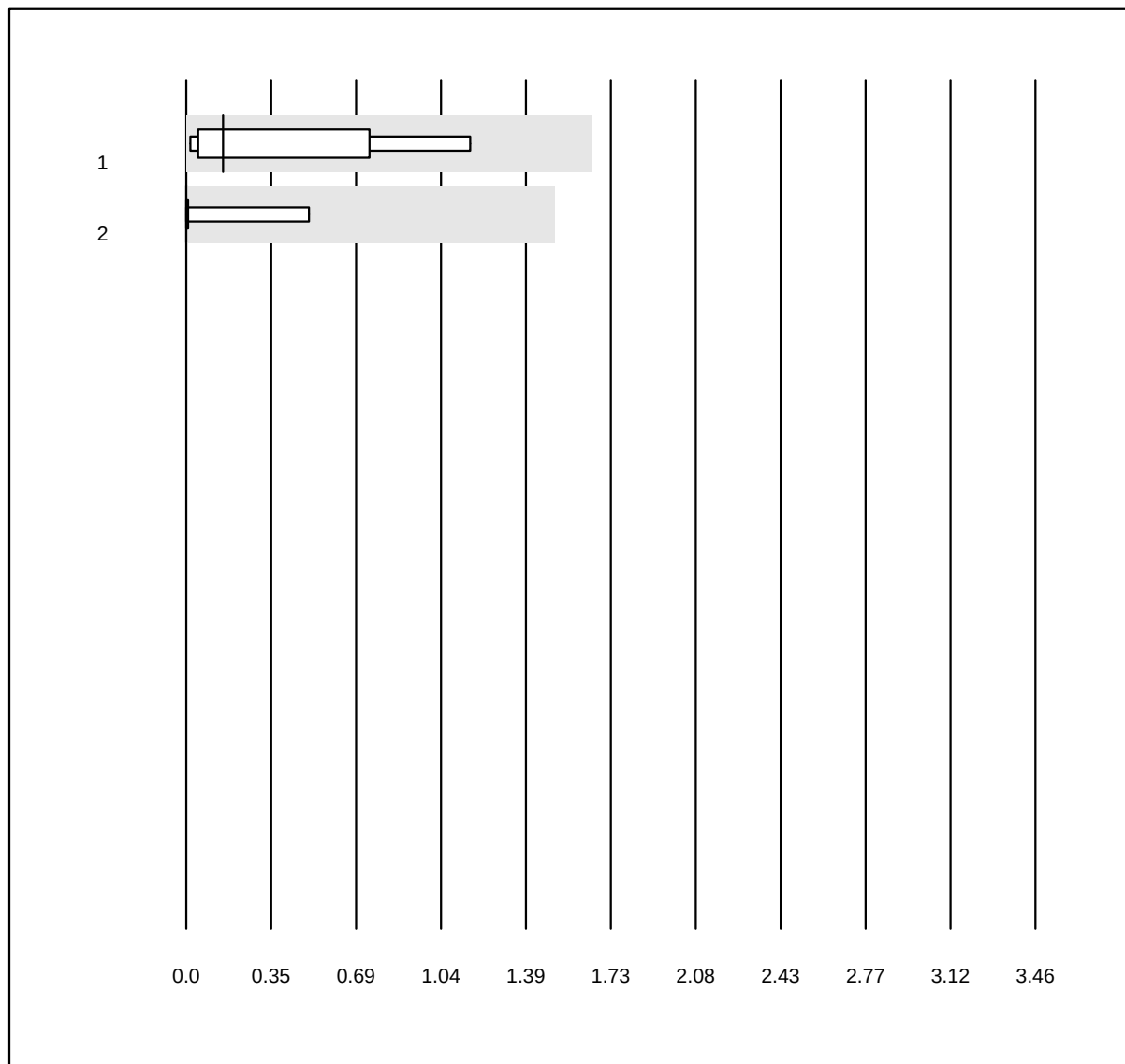


MQ Toleranz: 30%
(< 5.0: +/- 1.5)

Indice itterico B ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Atellica	9	100.0	0.0	0.0	0.15	127.0	e
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	0.00	267.2	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice di lipemia A

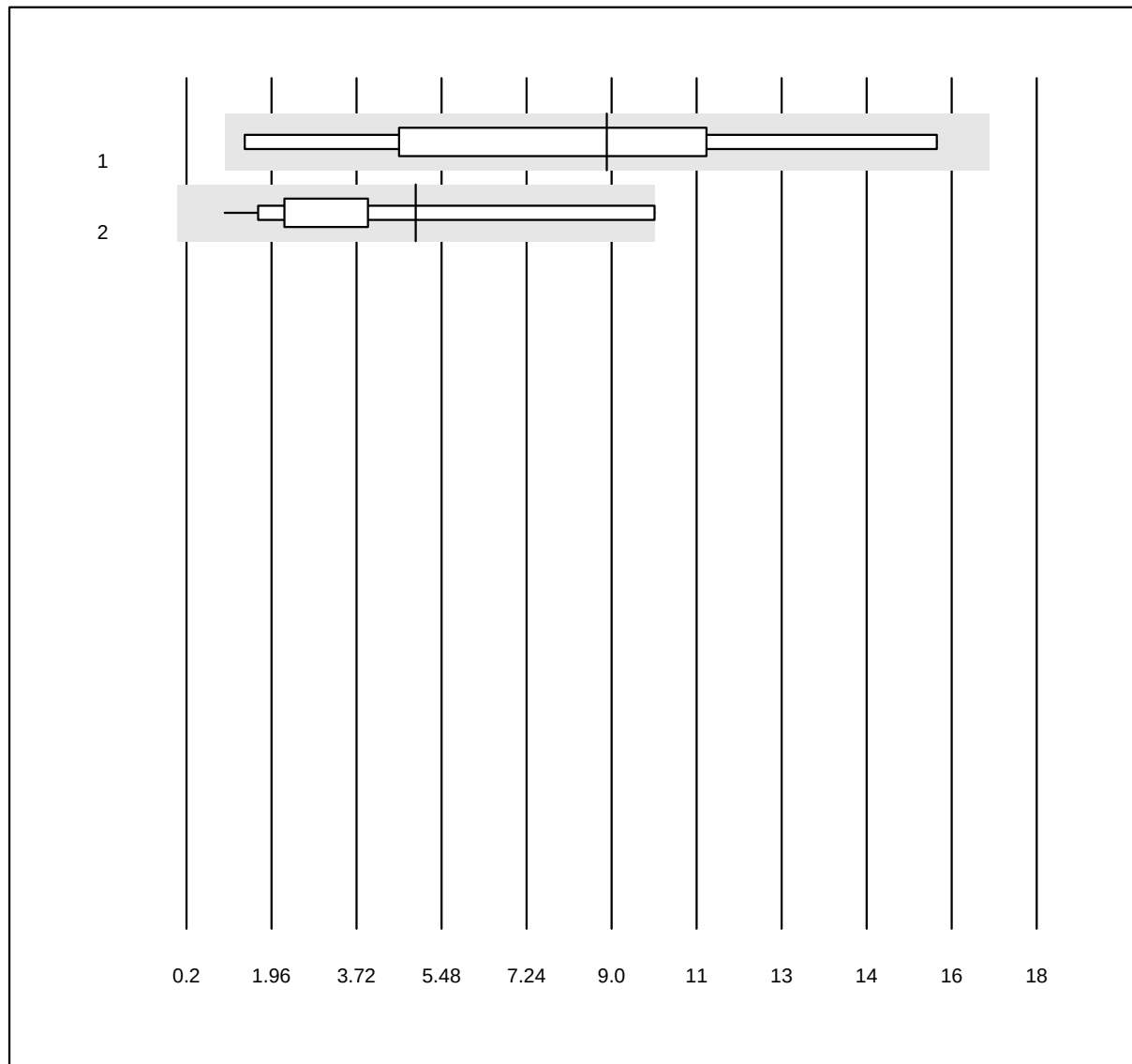


MQ Toleranz: 30%
(< 10.0: +/- 8.0)

Indice di lipemia A ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Atellica	9	100.0	0.0	0.0	9.00	51.7	a*
2 Cobas	16	100.0	0.0	0.0	5.00	67.9	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Indice di lipemia B

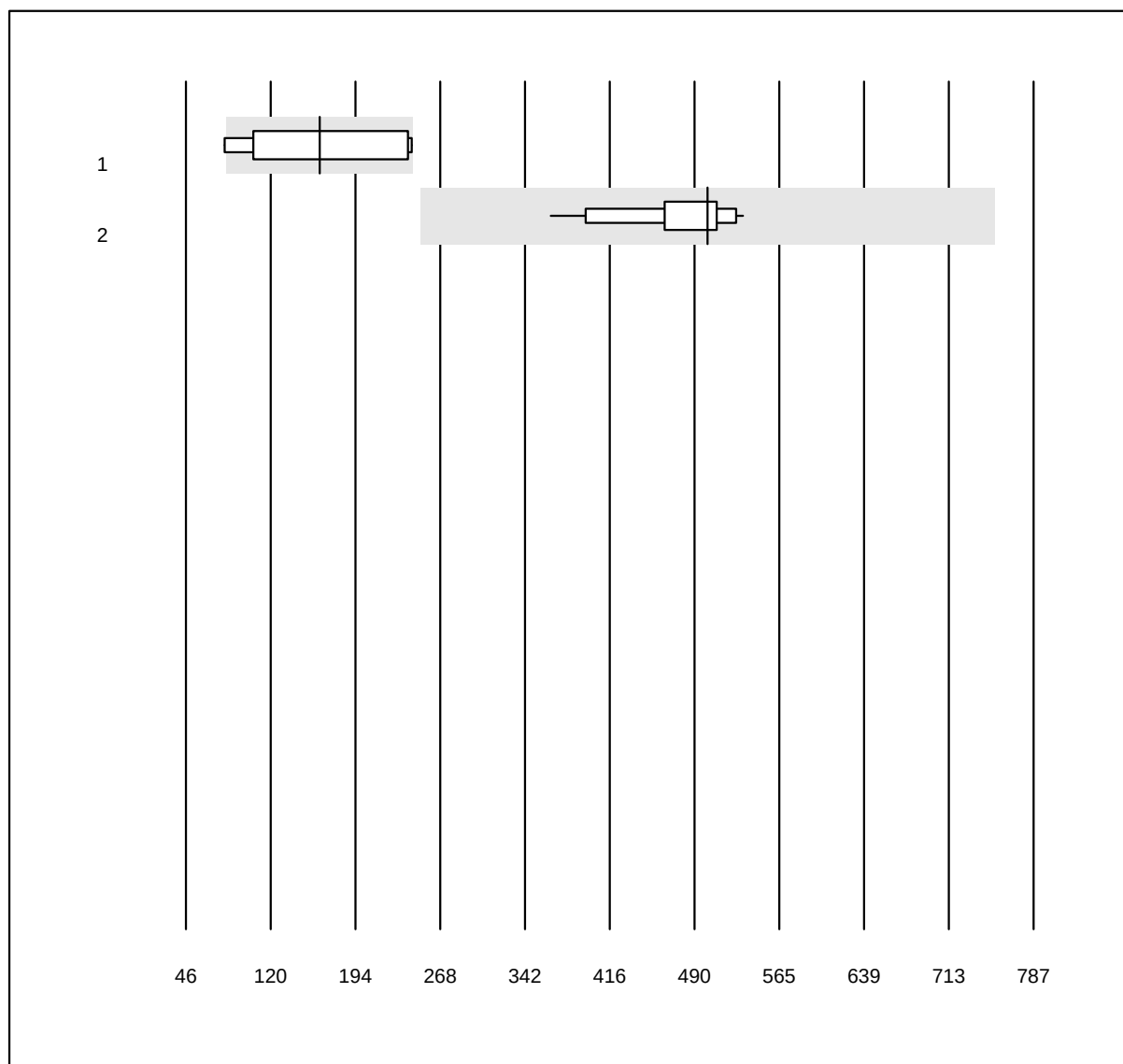


MQ Toleranz: 30%

Indice di lipemia B ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Atellica	9	88.9	11.1	0.0	163.00	40.1	a*
2 Cobas	16	87.5	0.0	12.5	502.00	9.1	a

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Velocità di eritrosedimentazione 1h

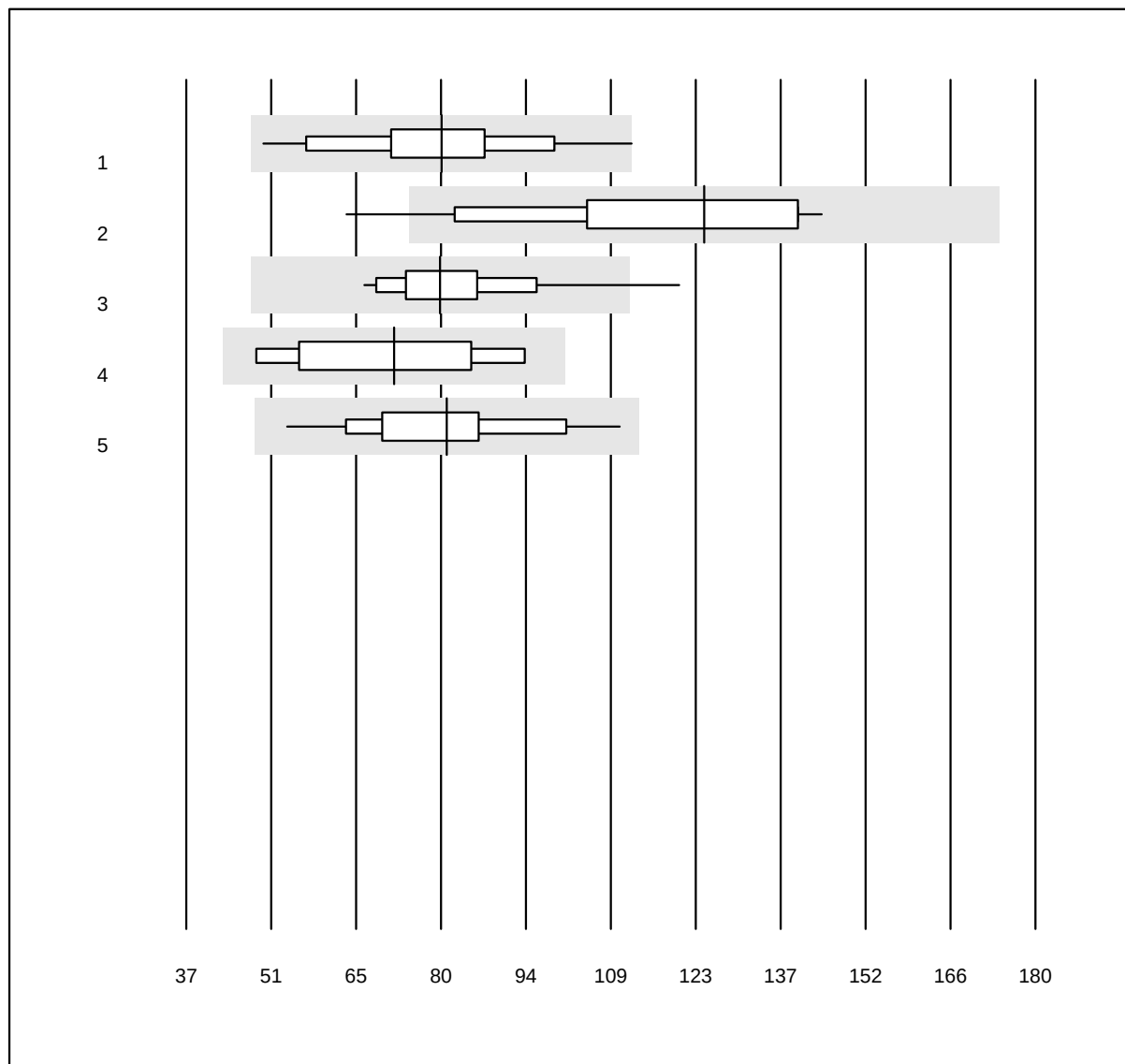


MQ Tolleranz: 40%

Velocità di
eritrosedimentazione 1h (m)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Sarstedt Sedivette	30	100.0	0.0	0.0	80	17.1	a
2 MINI-CUBE	41	95.1	4.9	0.0	124	18.6	e
3 BD Seditainer	40	95.0	2.5	2.5	80	13.9	e
4 Sarstedt Microvette	5	100.0	0.0	0.0	72	21.5	e*
5 altri metodi	19	94.7	0.0	5.3	81	16.5	e

Velocità di eritrosedimentazione 2h

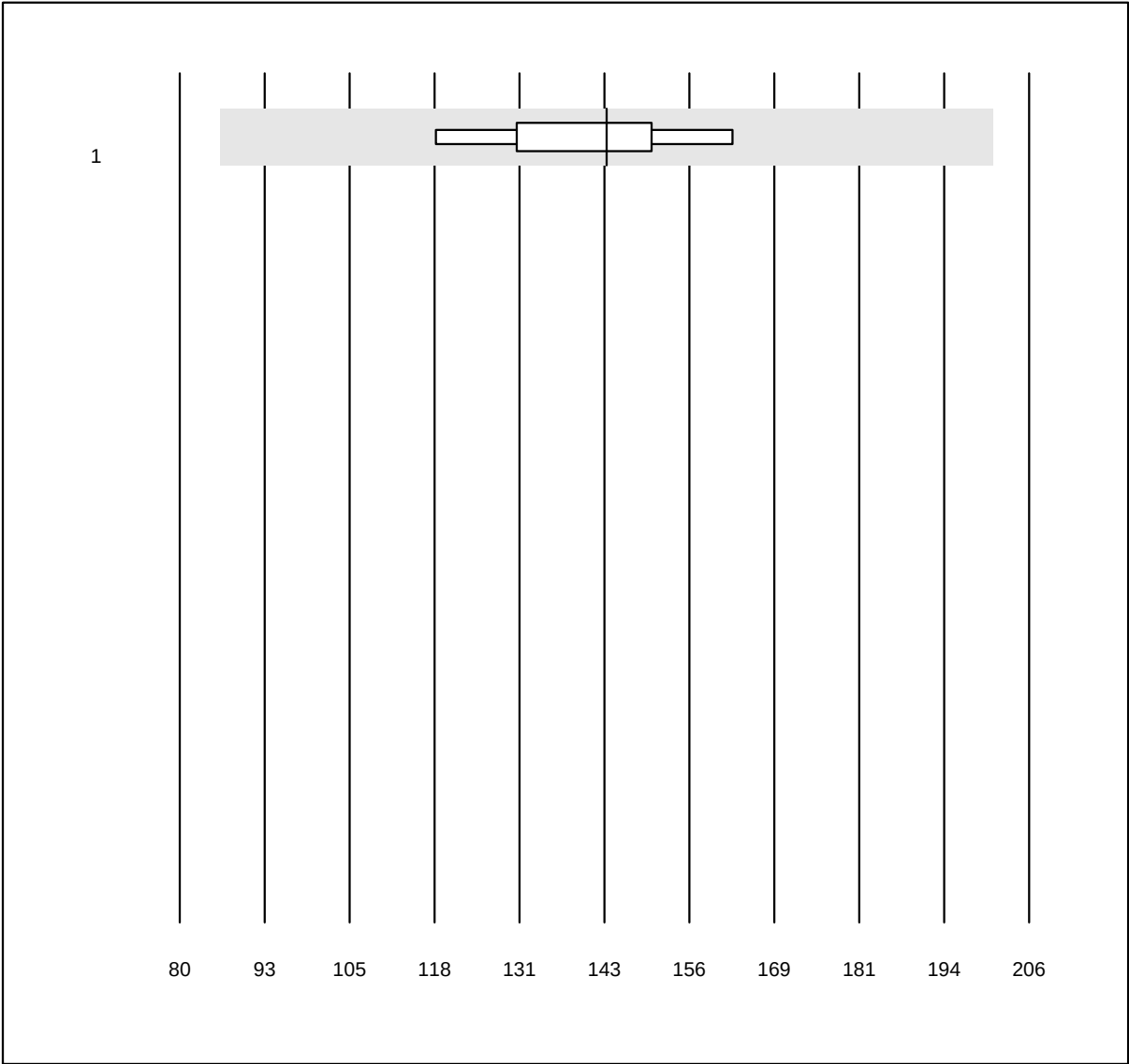


MQ Toleranz: 40%

Velocità di eritrosedimentazione 2h (m

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sarstedt Sedivette	7	100.0	0.0	0.0	143	9.5	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Emoglobina HS

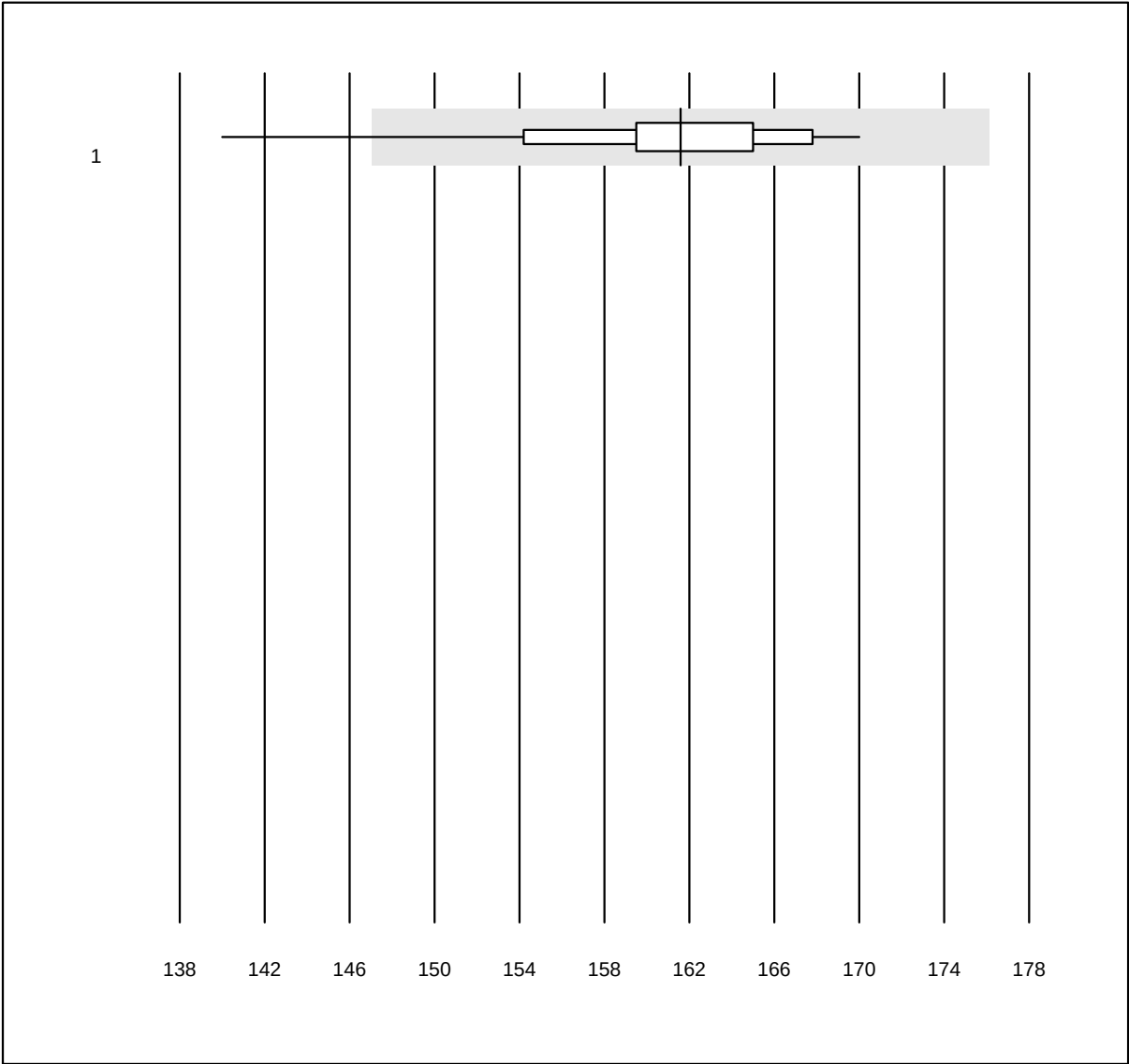


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina HS (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	PixCell HemoScreen	44	90.9	2.3	6.8	161.6	3.5	e

Ematocrito HS

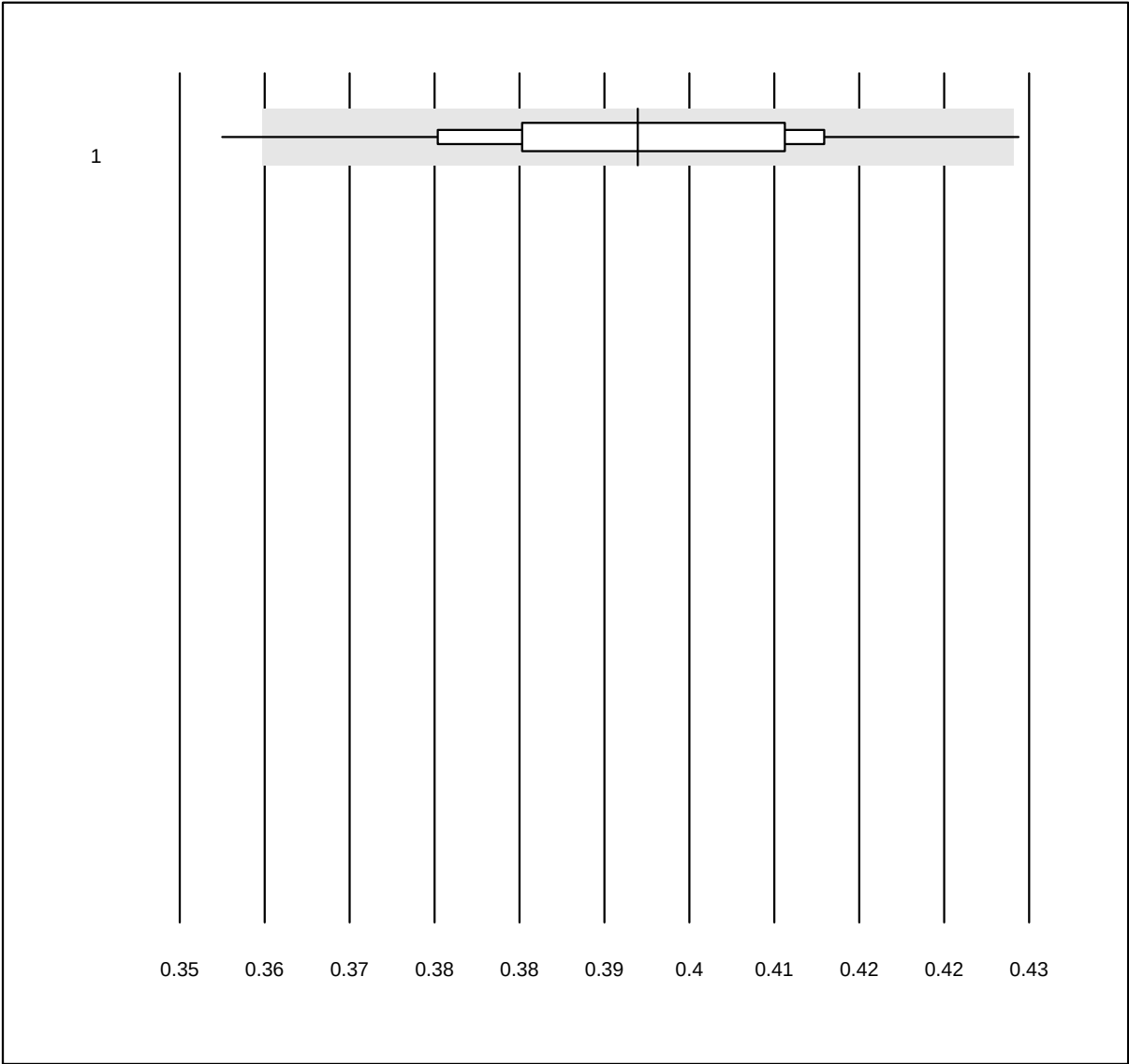


QUALAB Toleranz: 9%

Ematocrito HS (H/H)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	PixCell HemoScreen	44	90.9	4.5	4.5	0.4	4.0	e

Eritrociti HS

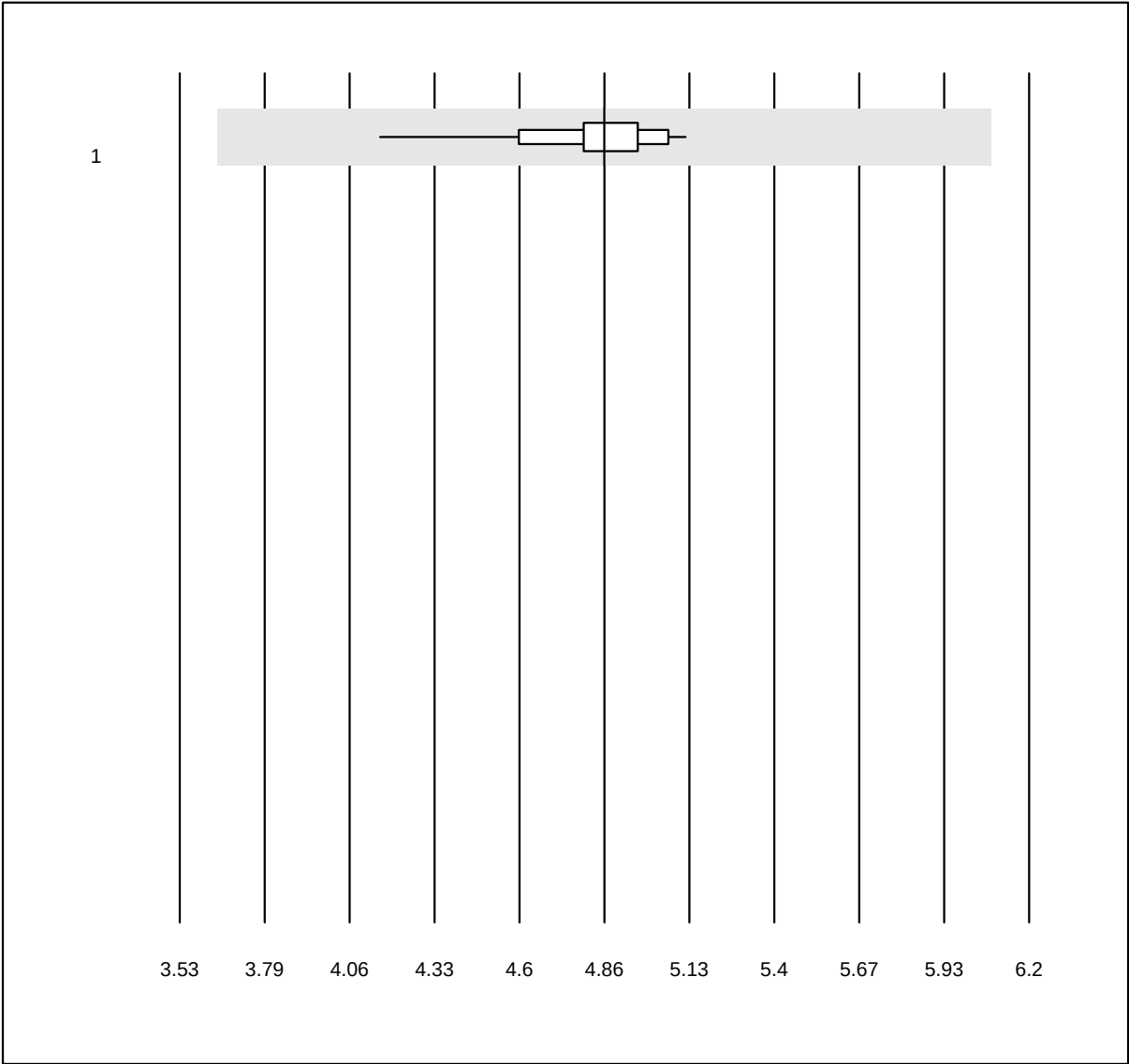


QUALAB Toleranz: 25%

Eritrociti HS (T/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	PixCell HemoScreen	44	97.7	0.0	2.3	4.86	4.1	e

Leucociti HS

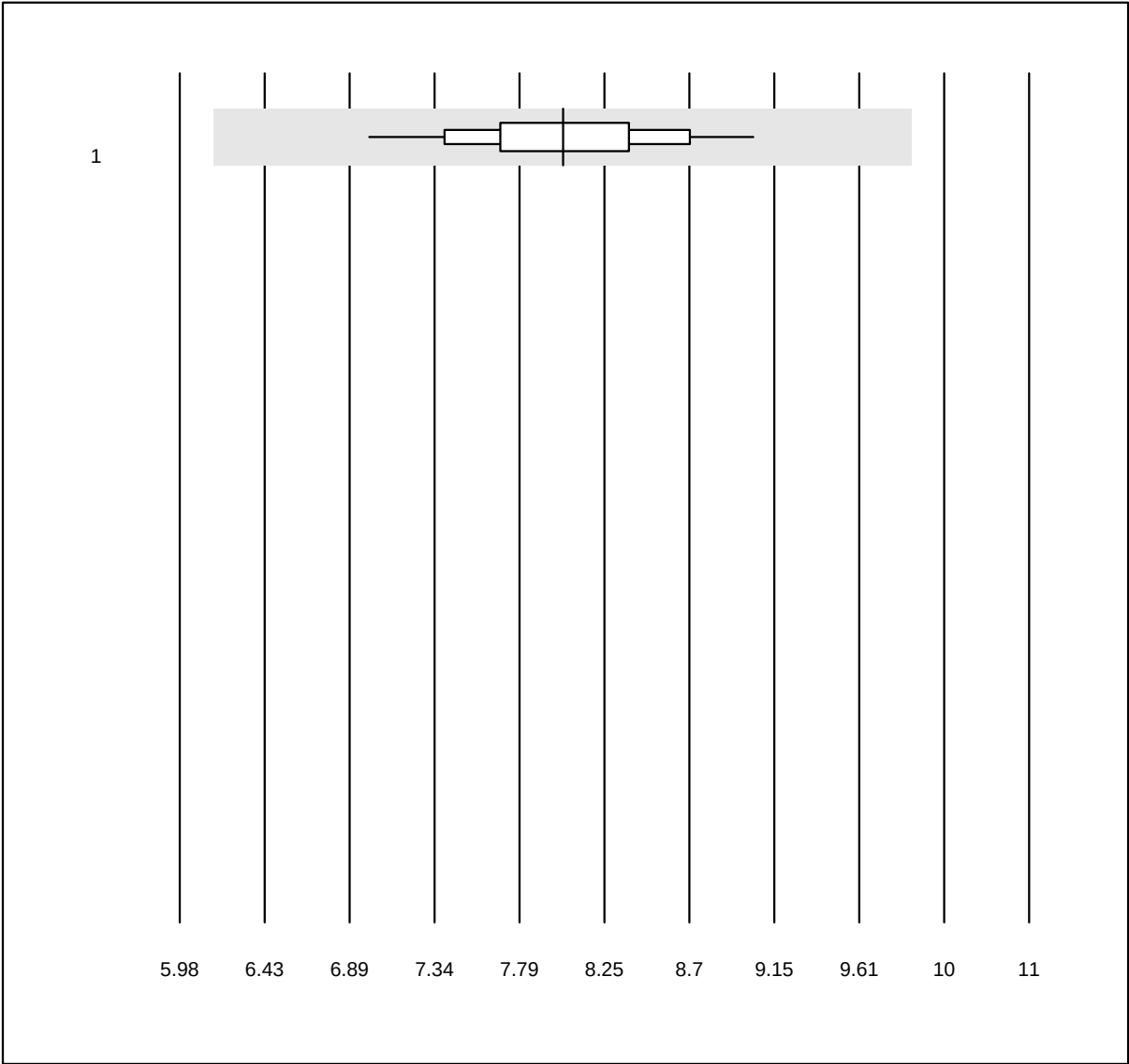


QUALAB Toleranz: 25%

Leucociti HS (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	PixCell HemoScreen	44	100.0	0.0	0.0	8.25	6.3	e

Trombociti HS

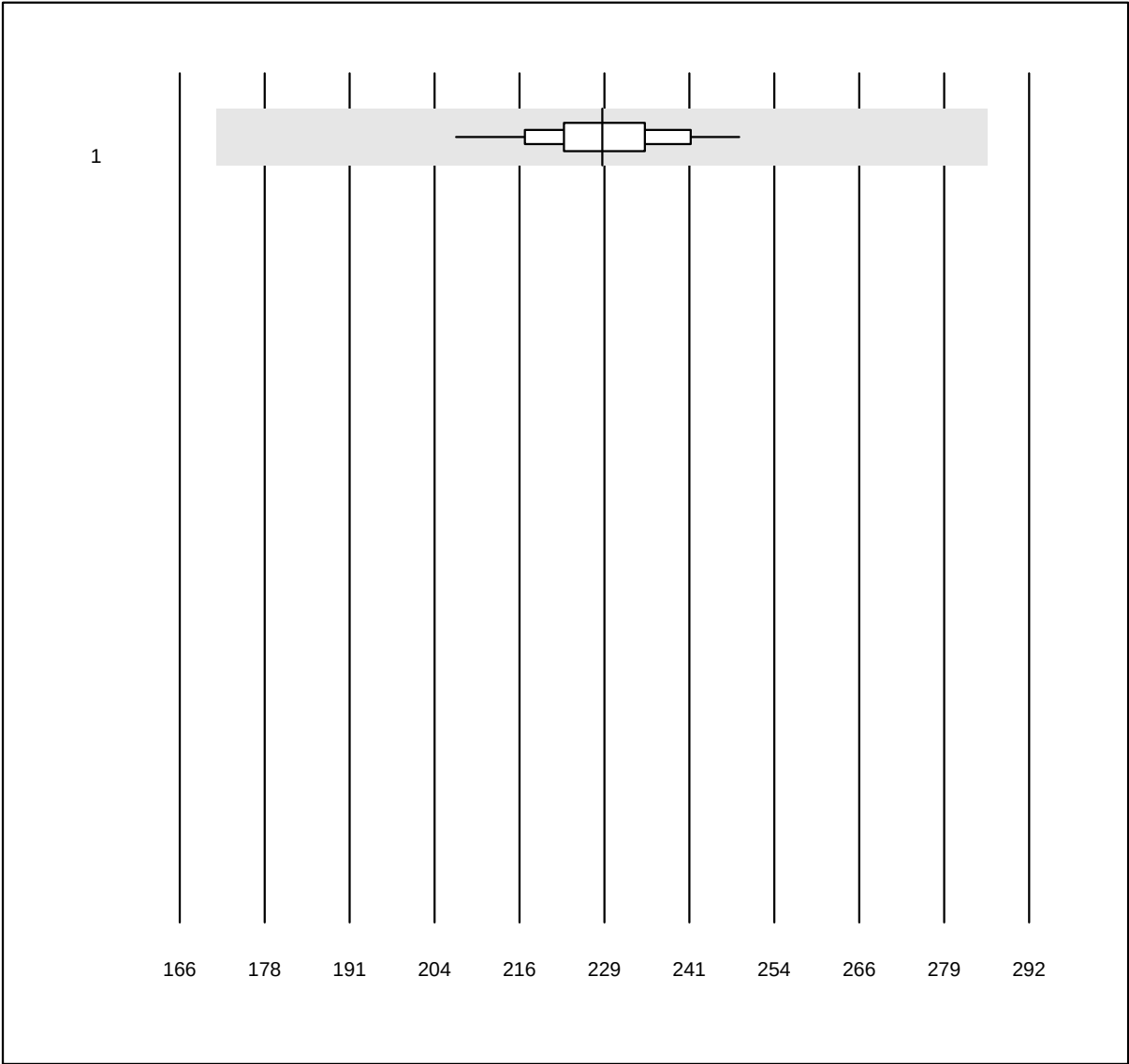


QUALAB Toleranz: 25%

Trombociti HS (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	PixCell HemoScreen	43	100.0	0.0	0.0	228.7	3.9	e

Eritrociti BF

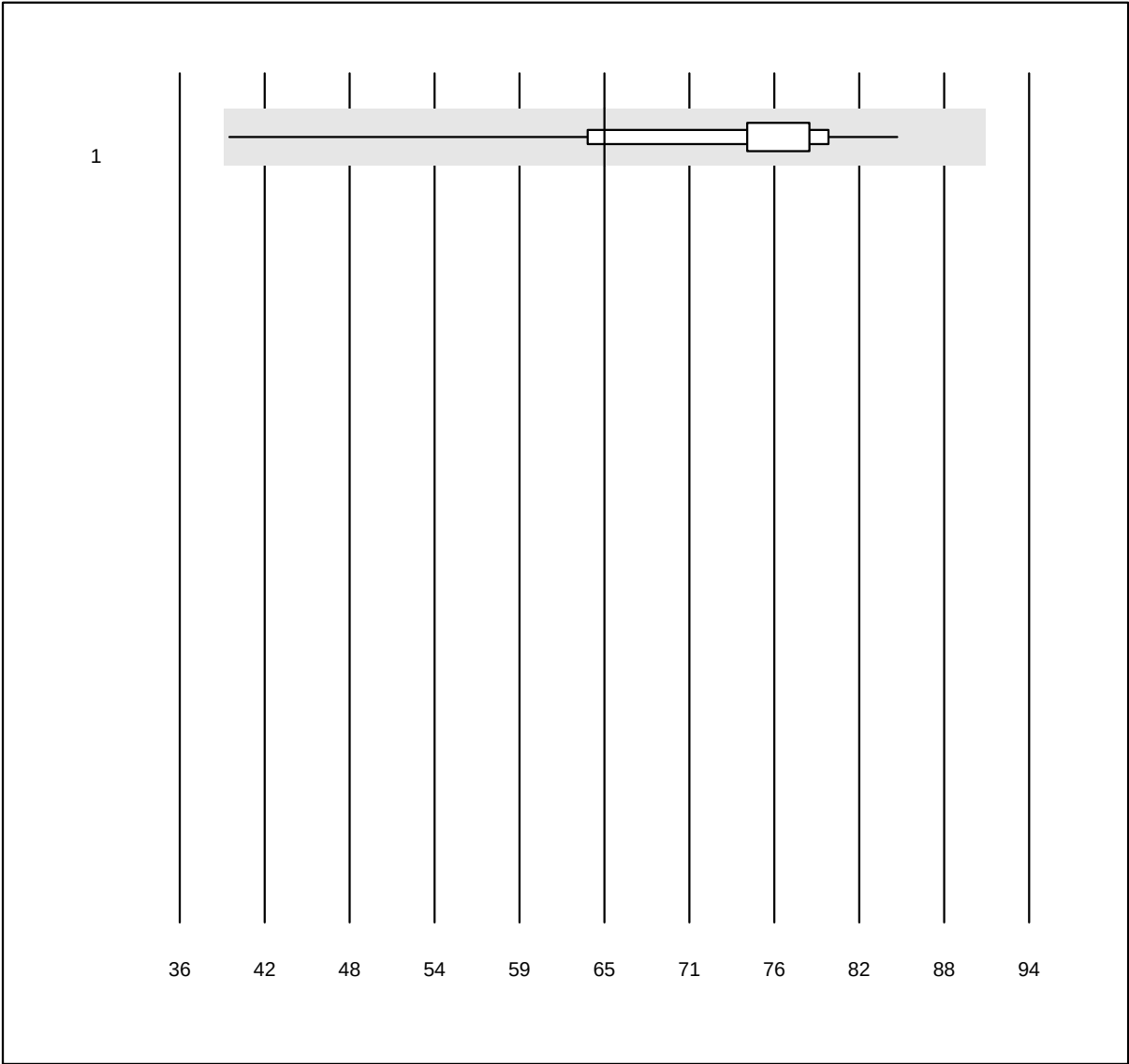


MQ Toleranz: 40%

Eritrociti BF (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	46	100.0	0.0	0.0	65.000	10.6	a

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Leucociti BF

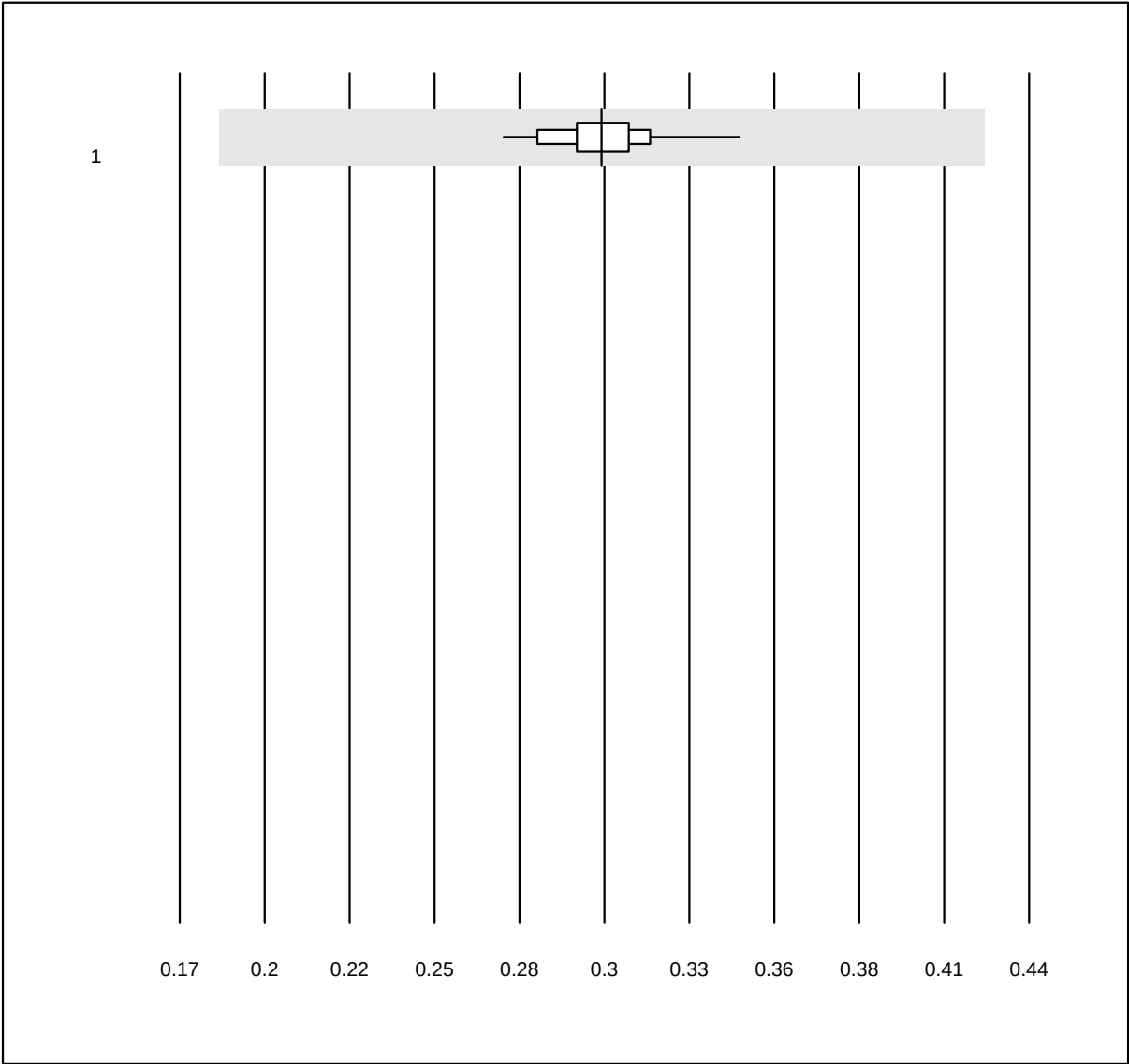


MQ Toleranz: 40%

Leucociti BF (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	48	100.0	0.0	0.0	0.304	4.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Cellule mononucleari (MN)

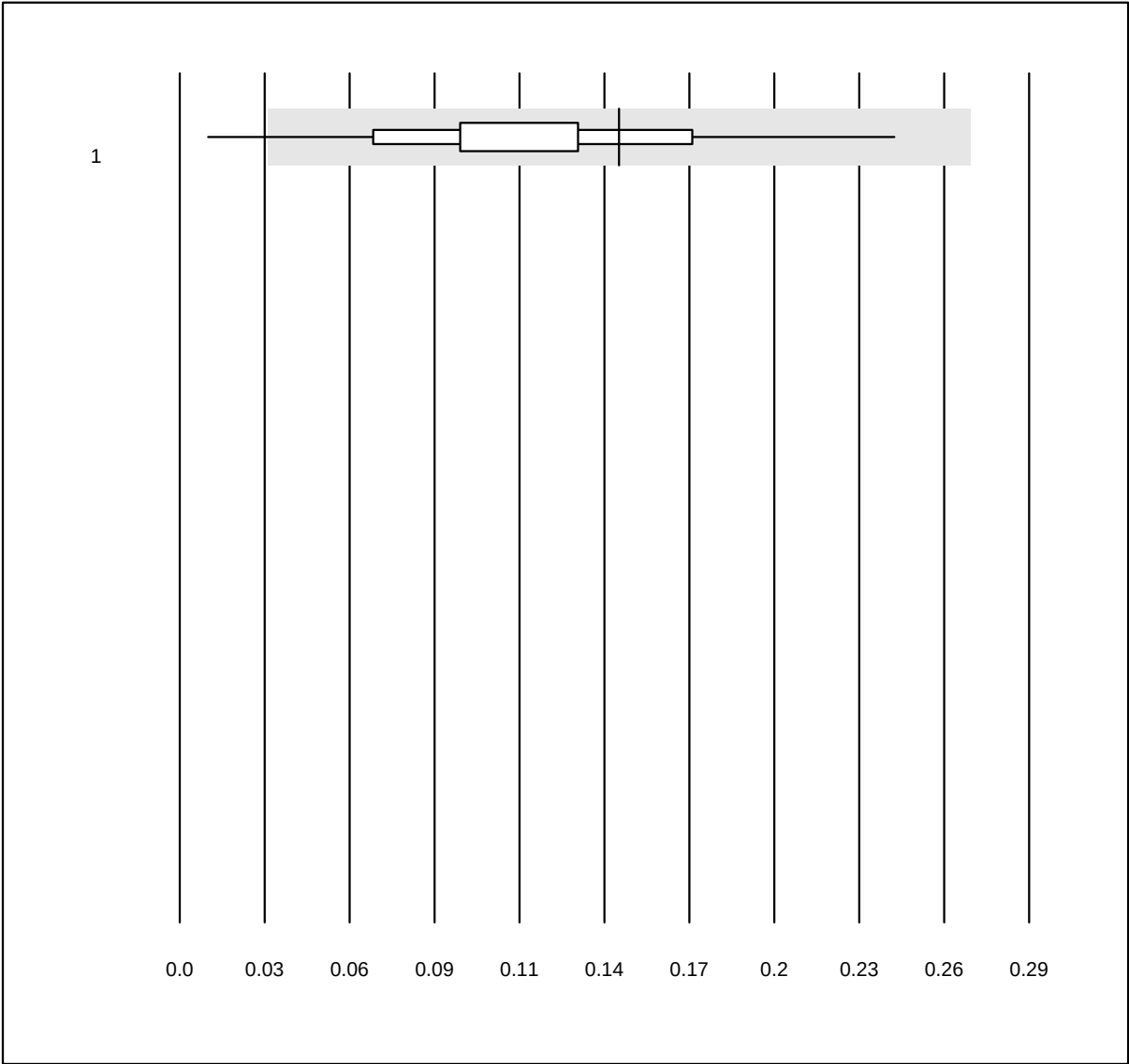


MQ Tolleranz: 40%

Cellule mononucleari (MN)
(G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	46	97.8	2.2	0.0	0.150	39.3	a

Cellule polinucleari (PMN)

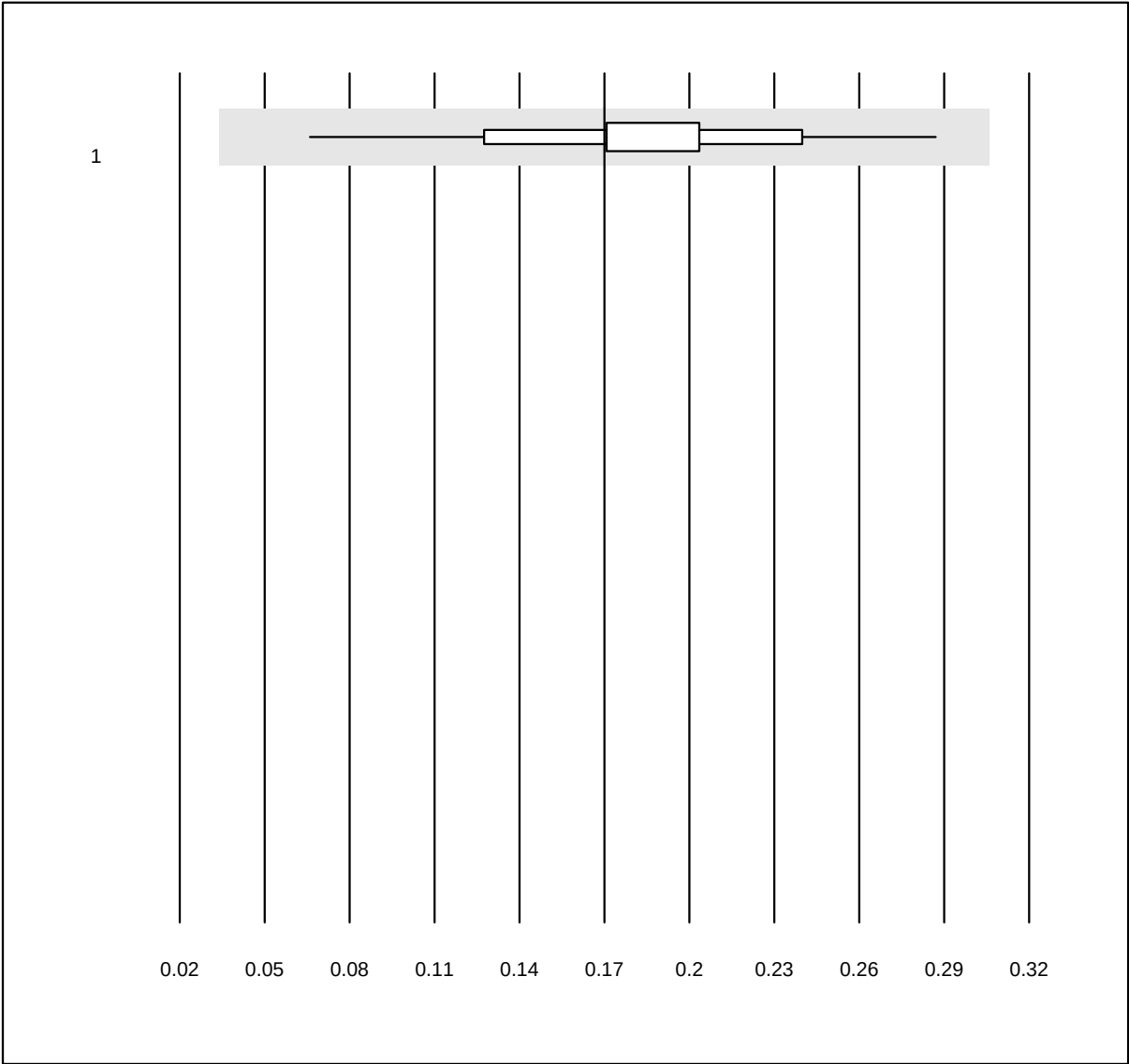


MQ Tolleranz: 40%

Cellule polinucleari (PMN)
(G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	46	100.0	0.0	0.0	0.170	24.9	a

Totale di cellule (TC)

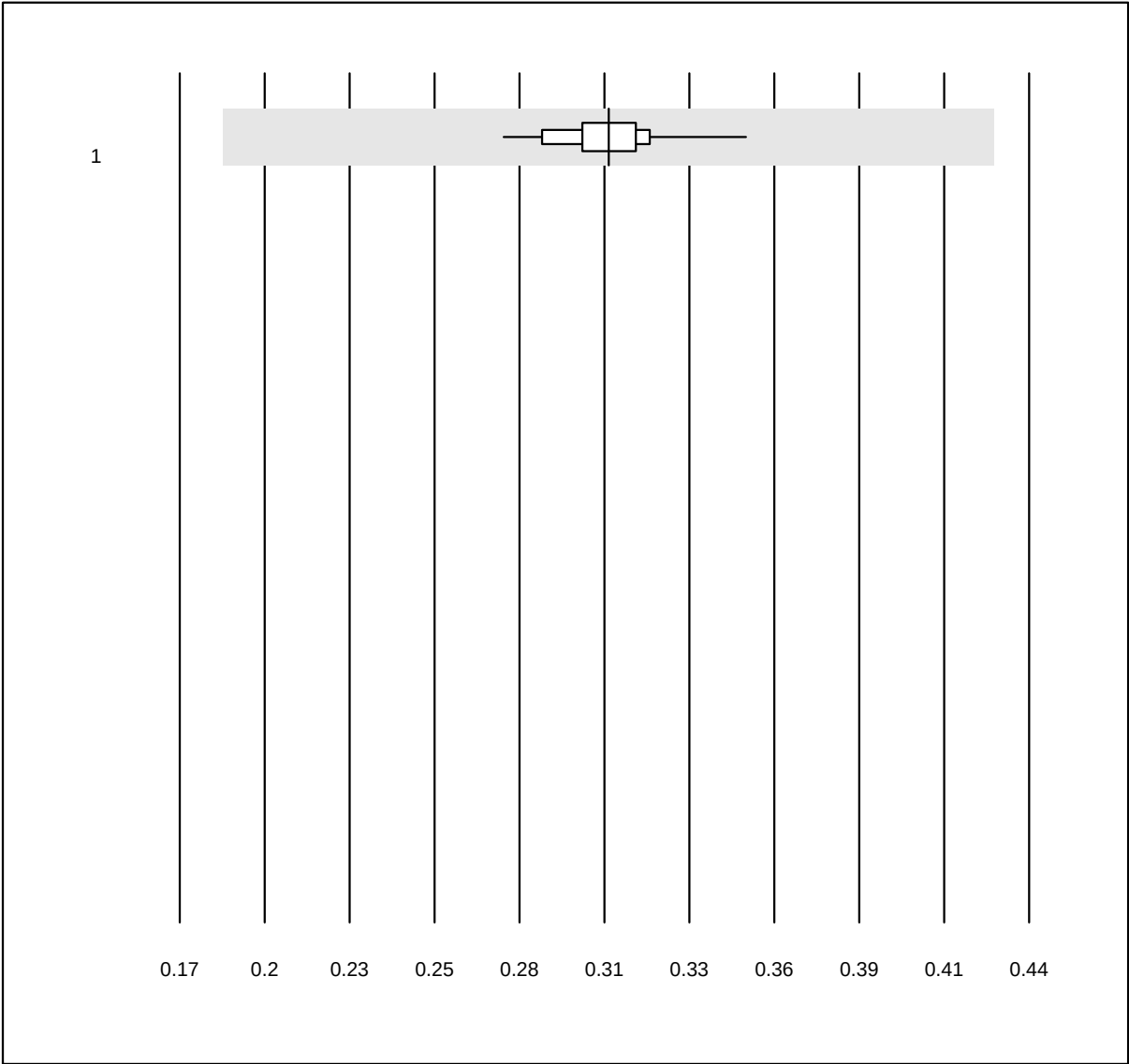


MQ Tolleranz: 40%

Totale di cellule (TC) (G/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	41	100.0	0.0	0.0	0.306	4.6	e

Velocità di eritrosedimentazione

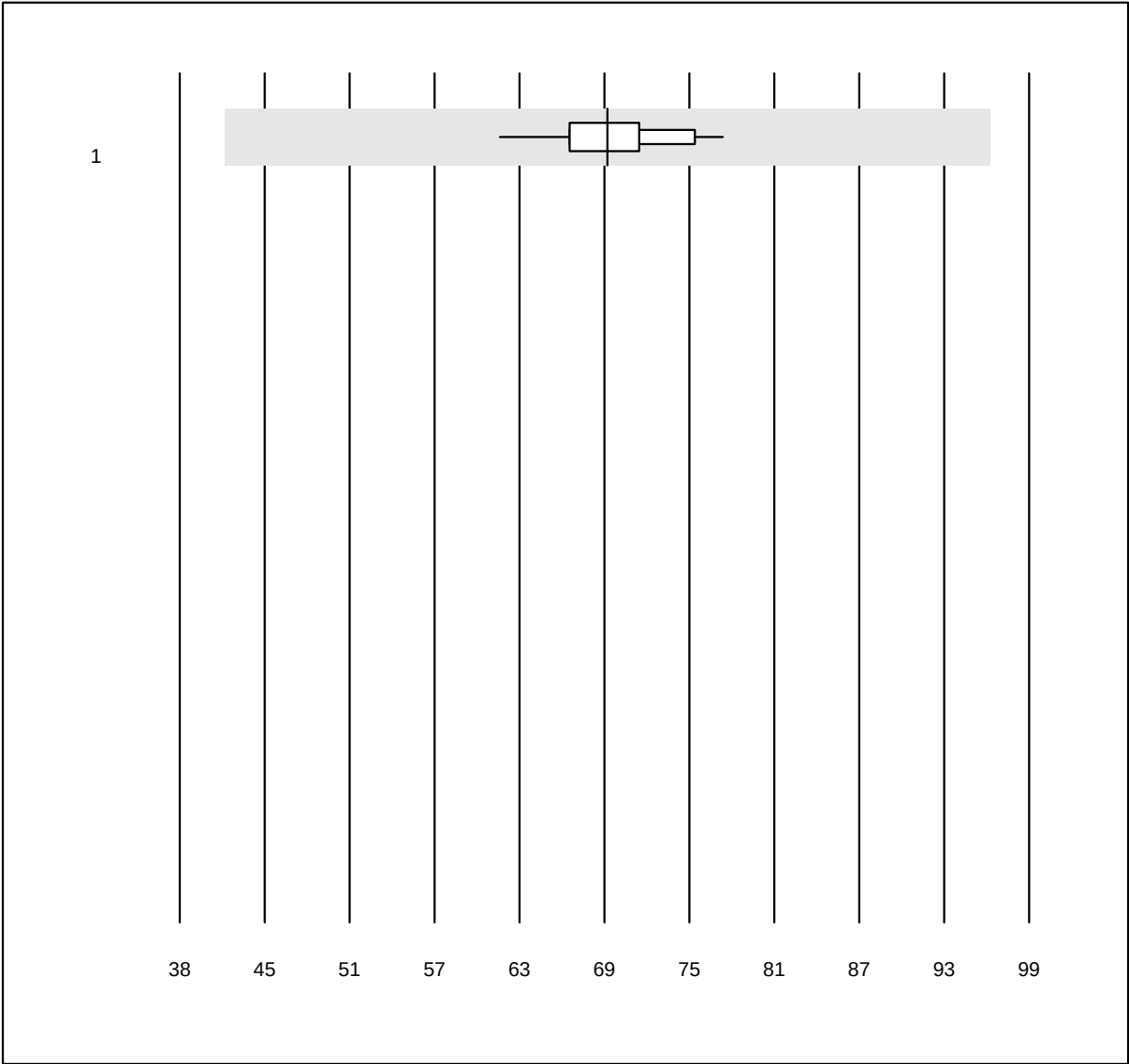


MQ Toleranz: 40%

Velocità di
eritrosedimentazione (mm/h)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	miniSed	30	96.7	0.0	3.3	69	5.1	e

CRP 1

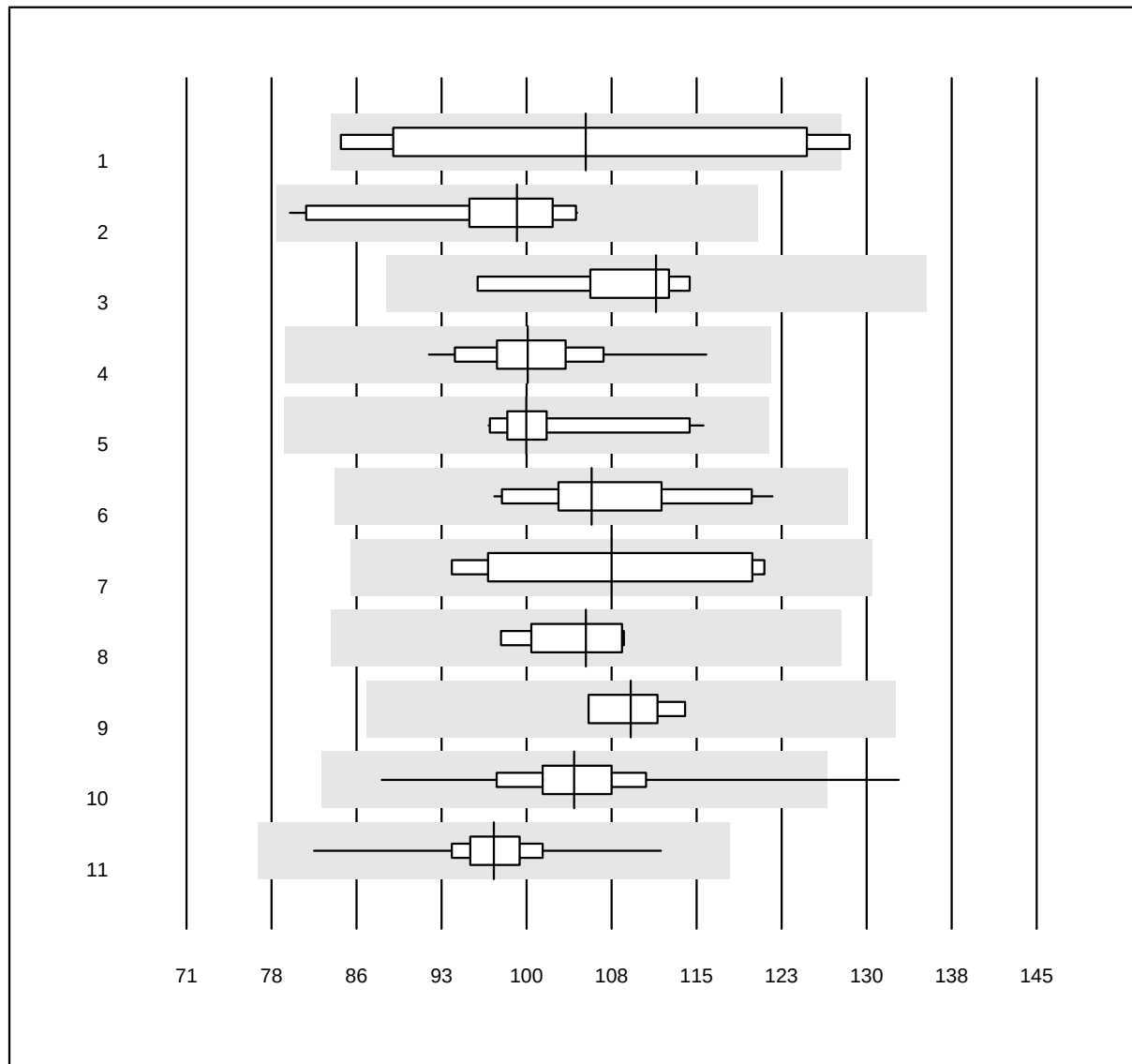


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Vitros	7	85.7	14.3	0.0	105.8	16.2	e*
2 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	99.8	7.5	e
3 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	111.9	4.8	e
4 Roche	50	96.0	0.0	4.0	100.7	5.2	e
5 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	100.6	5.3	e
6 Autolyser	14	85.7	0.0	14.3	106.3	6.2	e
7 Fuji Dri-Chem	10	60.0	0.0	40.0	108.0	10.6	a*
8 Spotchem D-Concept	5	100.0	0.0	0.0	105.8	3.9	e
9 Piccolo	7	100.0	0.0	0.0	109.7	2.9	e
10 Afinion	979	99.5	0.2	0.3	104.7	5.1	e
11 Cobas b101/Click	487	99.2	0.0	0.8	97.8	3.6	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CRP 2

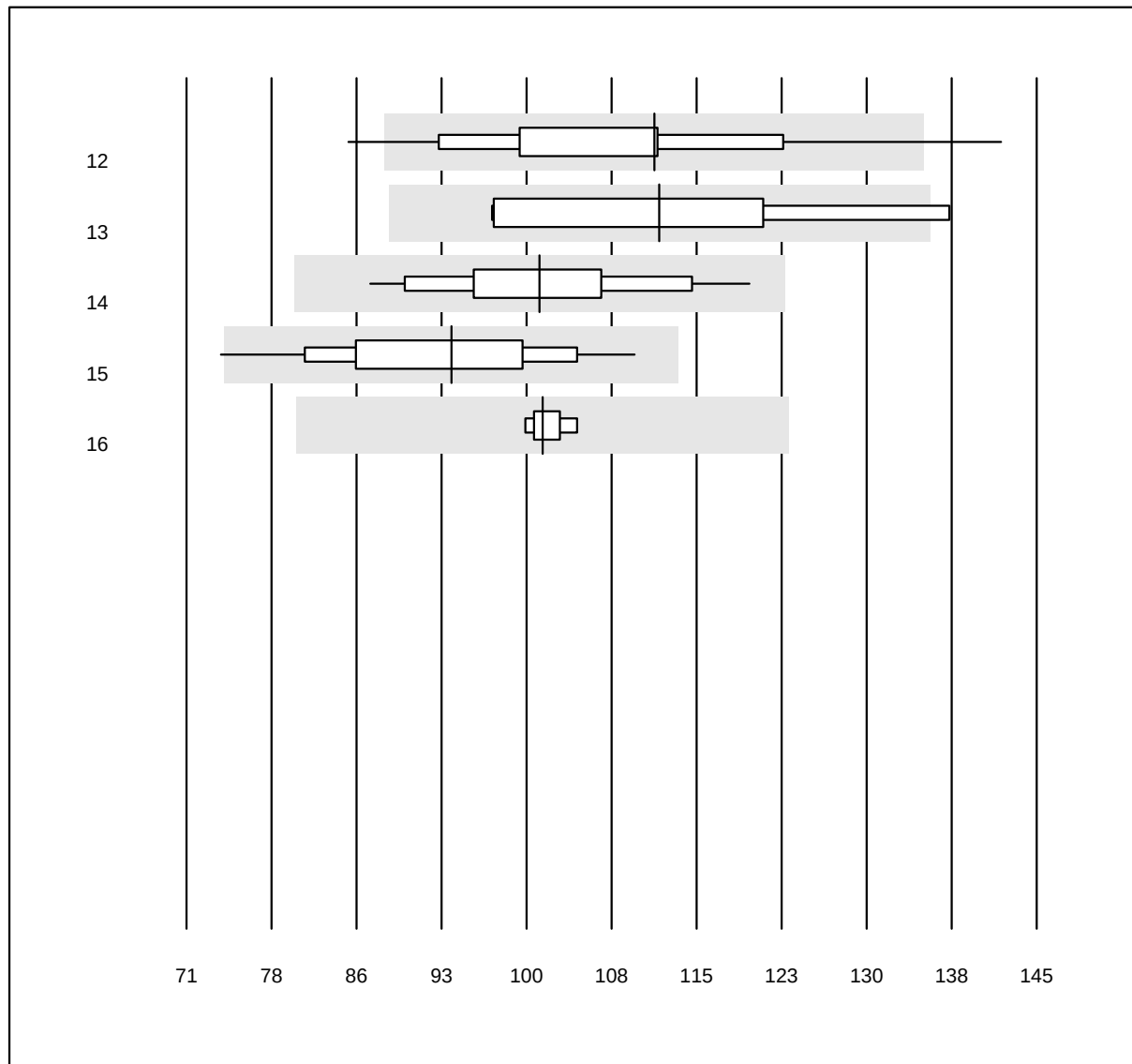


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Eurolyser	39	71.8	7.7	20.5	111.7	11.5	e
13 Turbidimetria	4	100.0	0.0	0.0	112.2	12.8	a*
14 Quick Read go	81	97.5	0.0	2.5	101.7	8.3	e
15 Nycocard SingleTest-Plasma	34	85.3	2.9	11.8	94.1	10.1	e
16 AQT 90 FLEX	4	100.0	0.0	0.0	102.0	1.2	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CRP QR

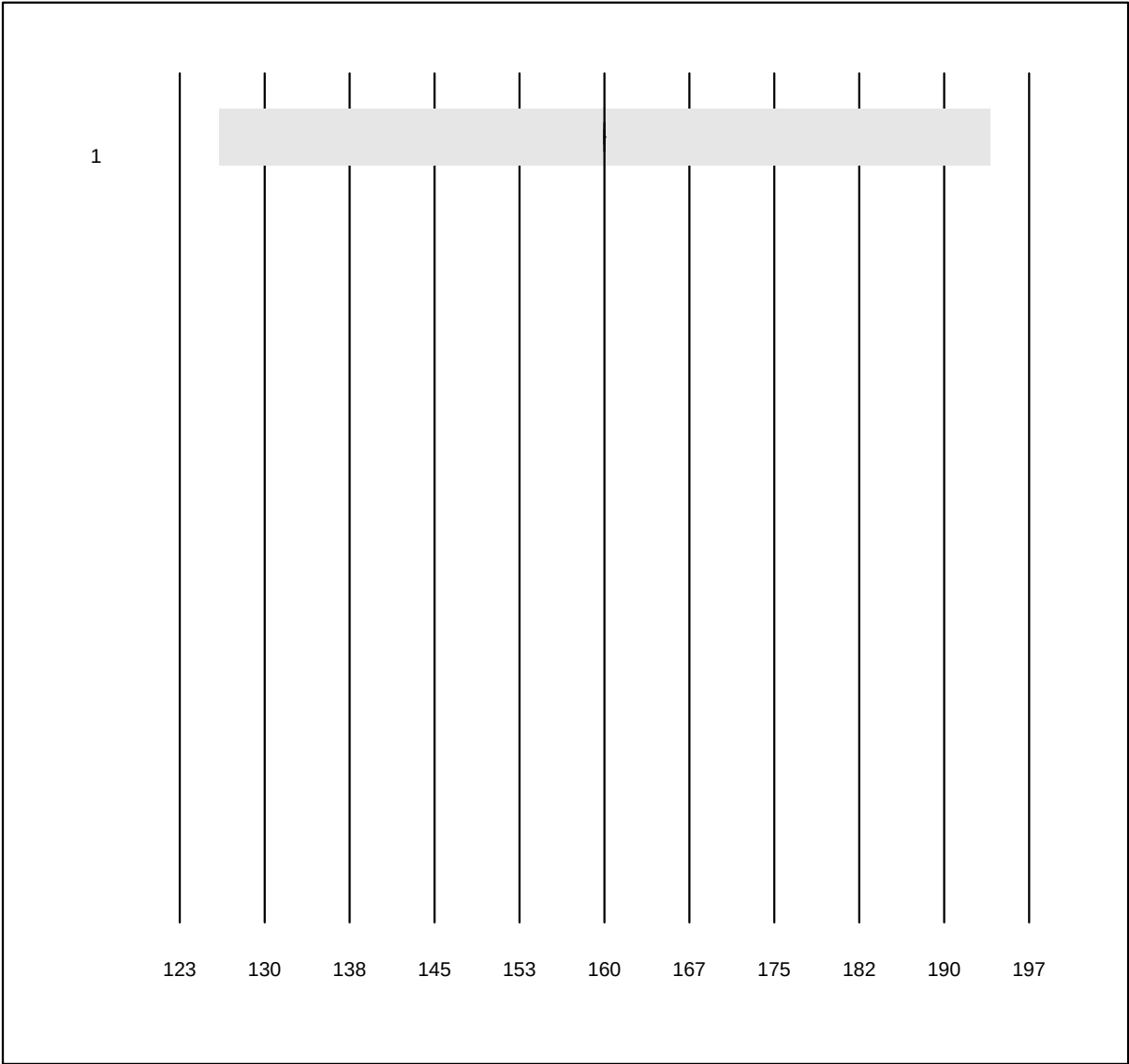


QUALAB Toleranz: 21%

CRP QR (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	QuickRead (sangue intero)	8	100.0	0.0	0.0	160.0	0.0	e

Alfa-1-Antitripsina

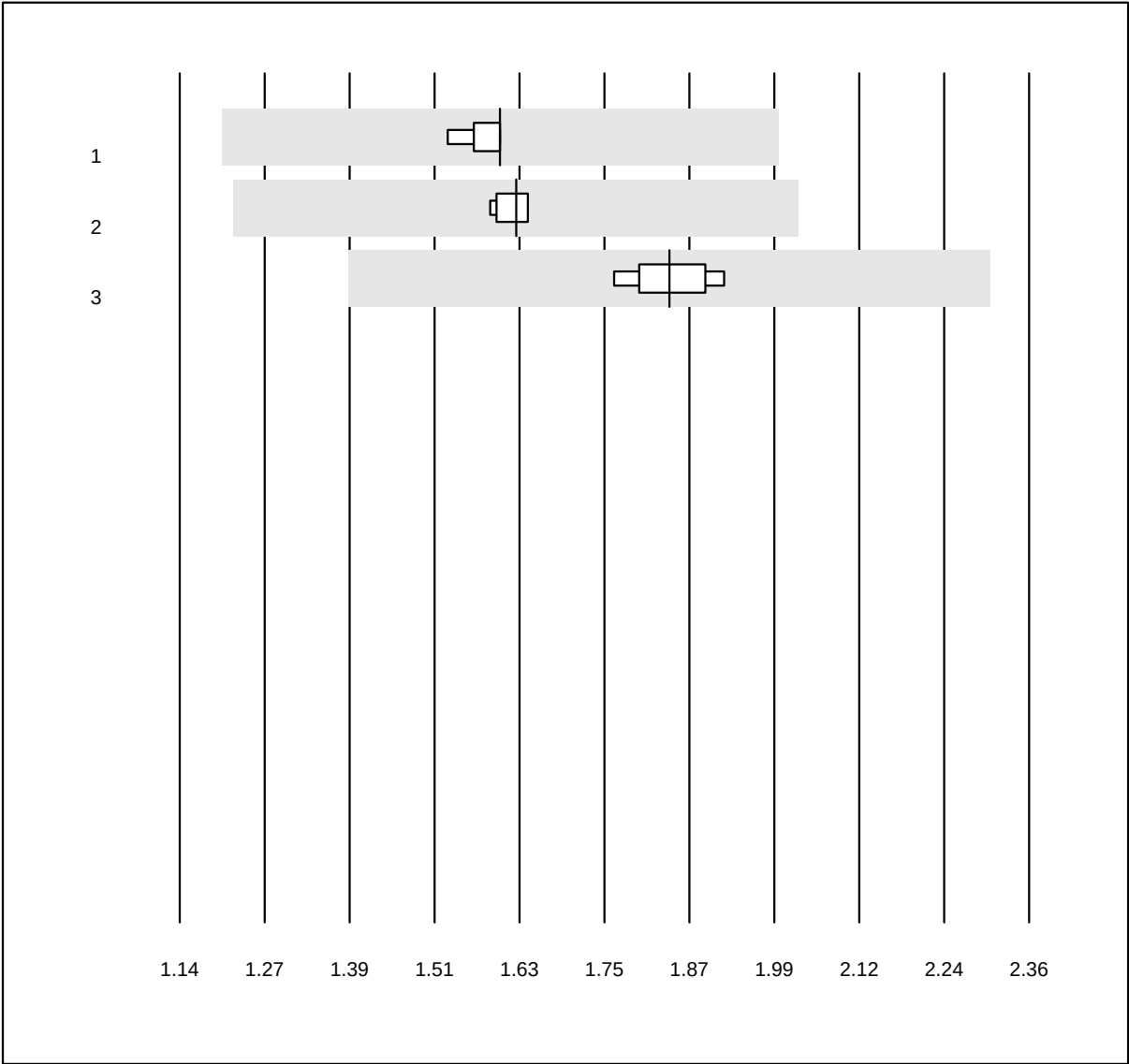


MQ Tolleranz: 25%

Alfa-1-Antitripsina (g/l)


No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	1.60	1.6	e
2 Roche	5	100.0	0.0	0.0	1.62	1.4	e
3 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	1.84	2.8	e

Anticorpi anti-streptolisina

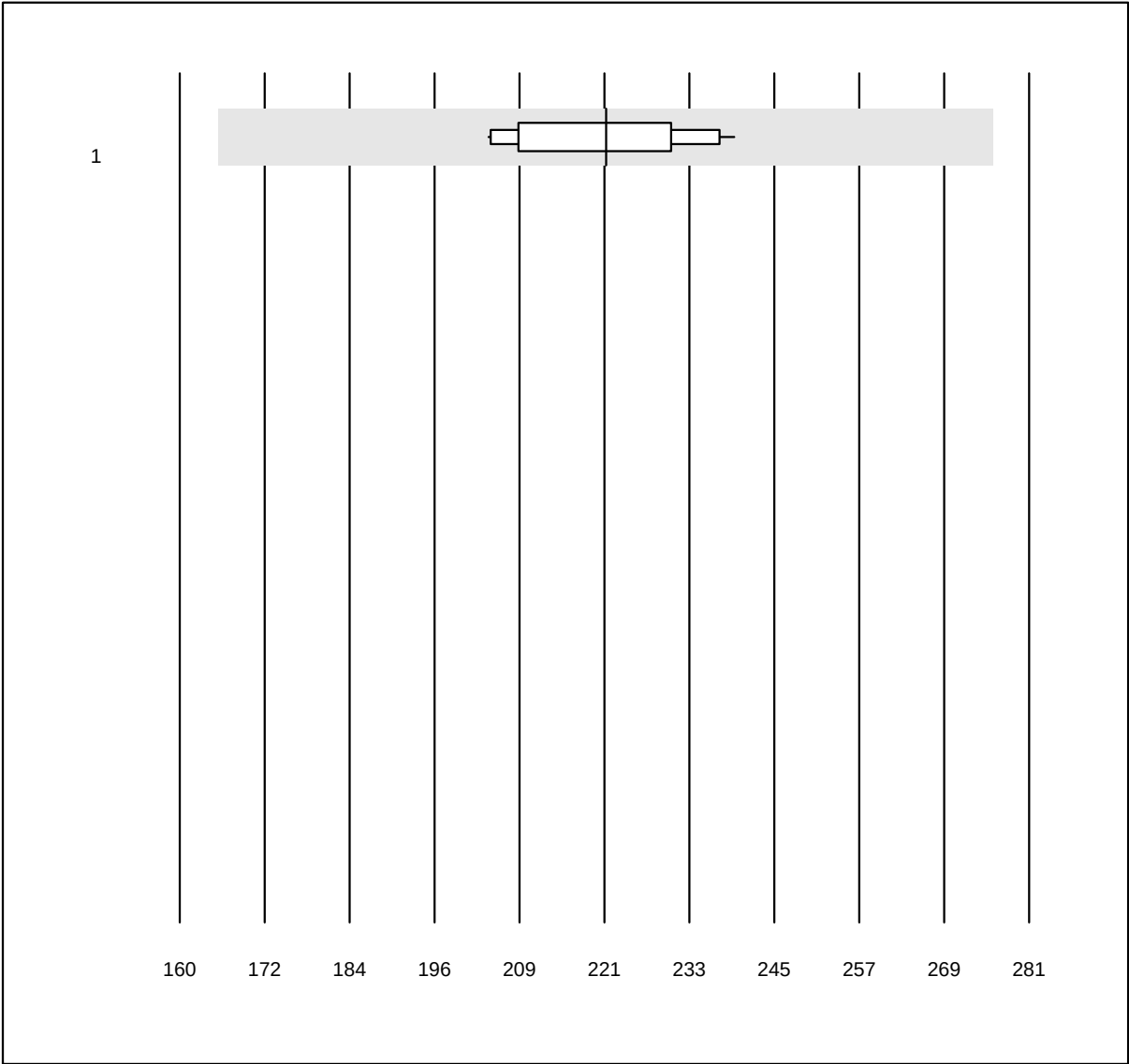

MQ Toleranz: 25%		Anticorpi anti-streptolisina (kIU/l)					
No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	12	100.0	0.0	0.0	221	5.2	e
3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)							

Beta-2 microglobulina

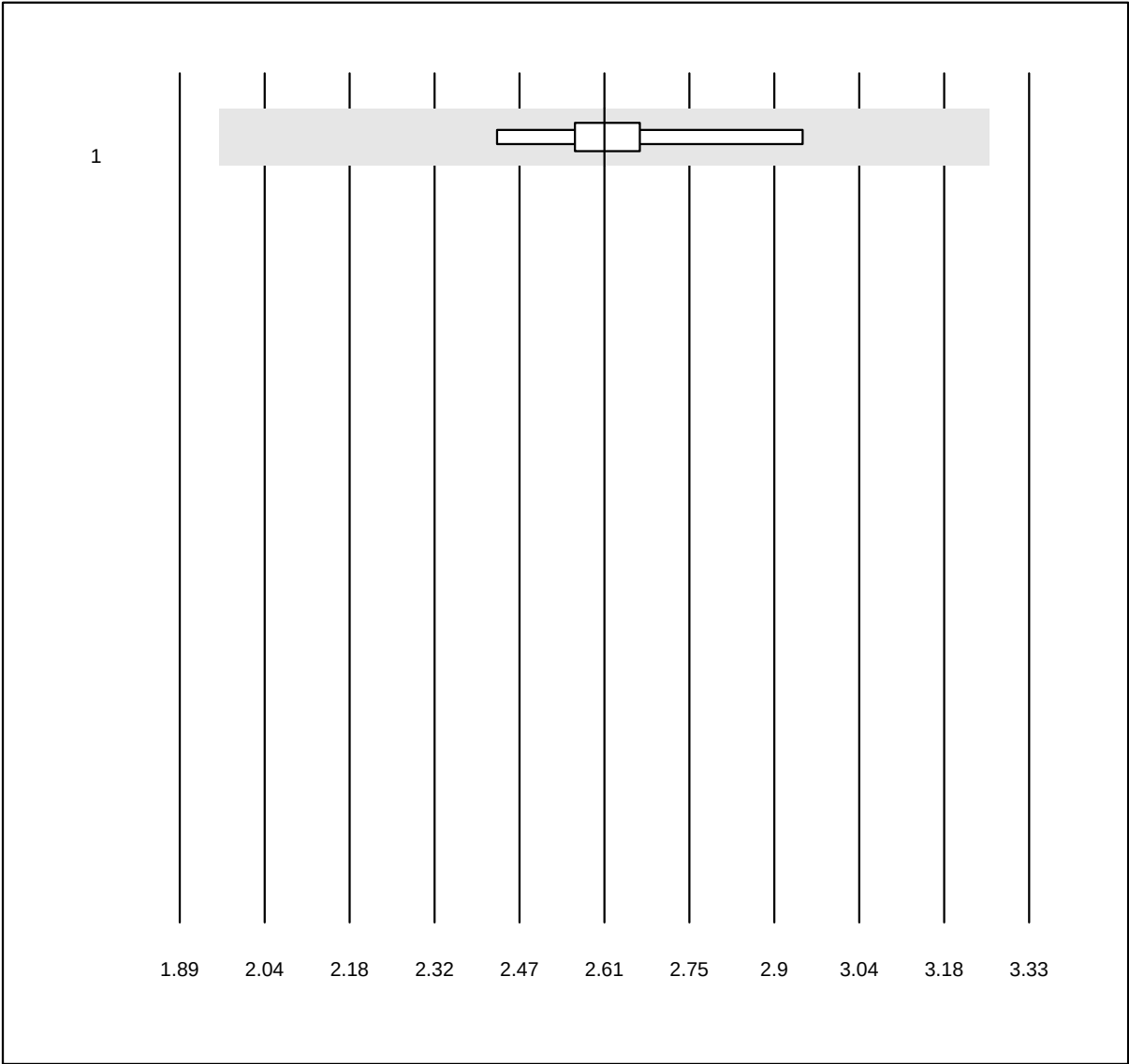


MQ Toleranz: 25%

Beta-2 microglobulina
(mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	2.61	5.2	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Complemento C3

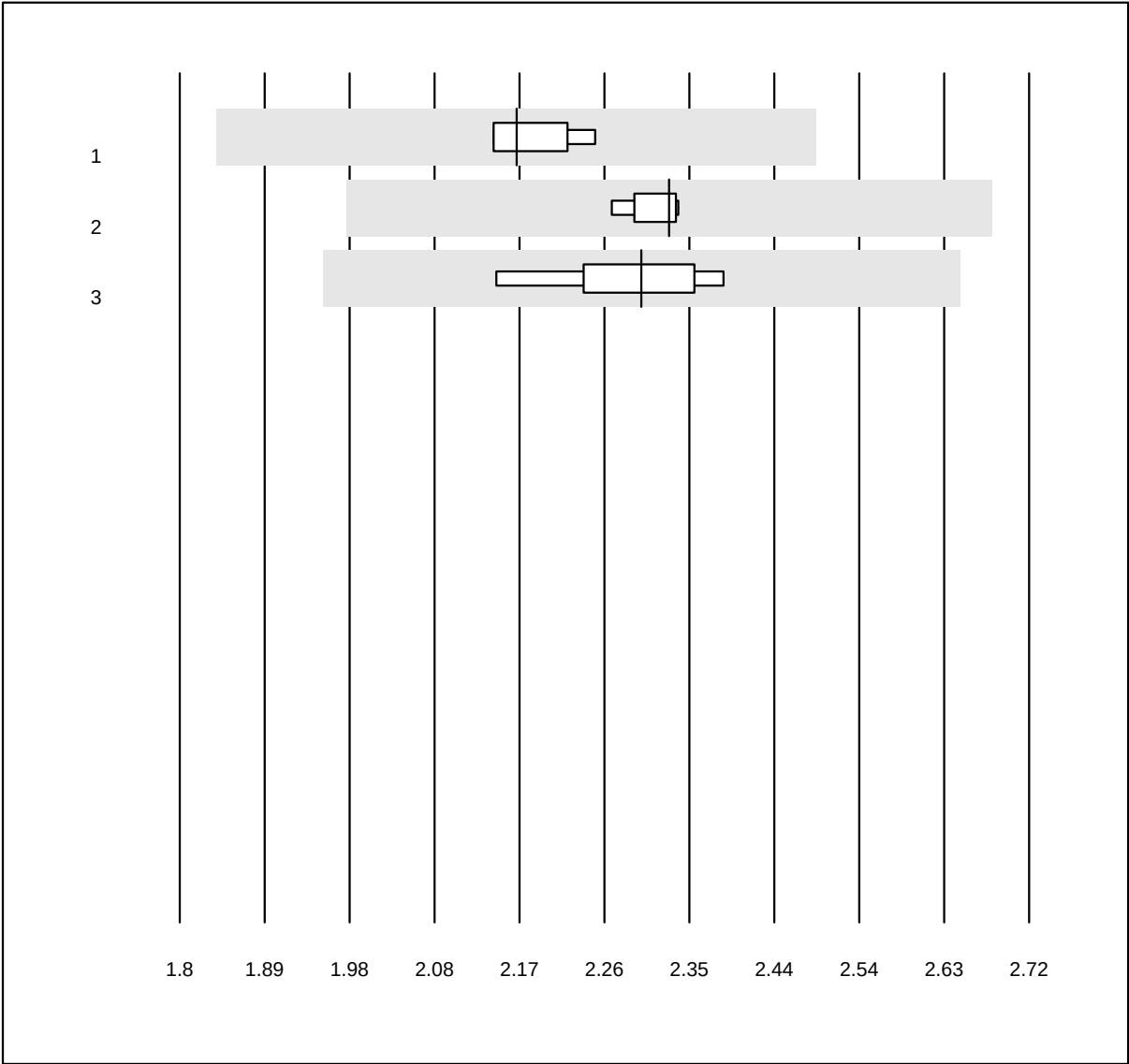


QUALAB Toleranz: 15%

Complemento C3 (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	2.17	2.0	e
2 Roche	8	100.0	0.0	0.0	2.33	1.1	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	2.30	3.3	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Complemento C4

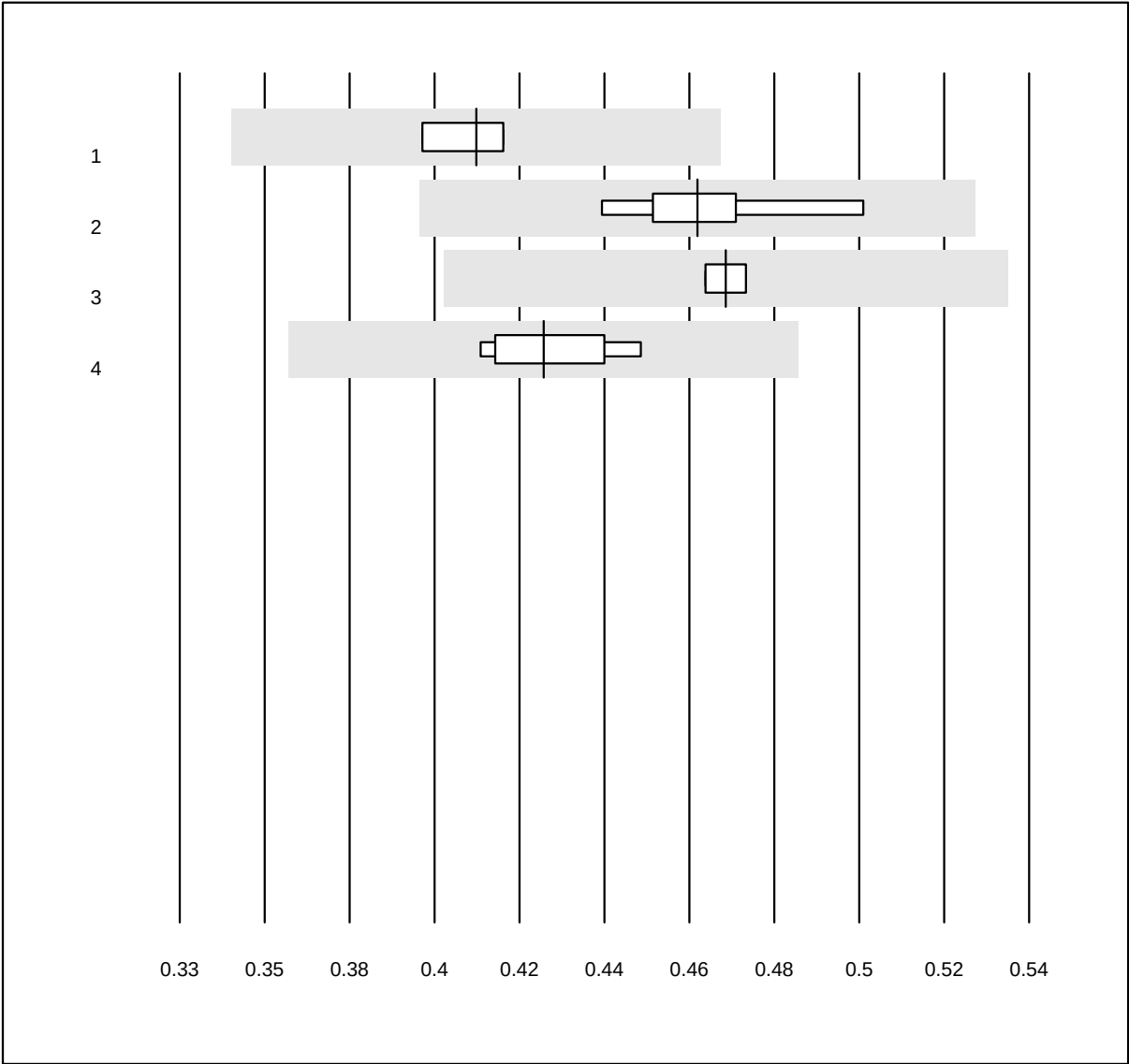


QUALAB Toleranz: 15%

Complemento C4 (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	0.40	2.2	e
2	Siemens	6	100.0	0.0	0.0	0.46	3.8	e
3	Alinity	4	100.0	0.0	0.0	0.47	1.2	e
4	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	0.42	3.3	e

Ceruloplasmina

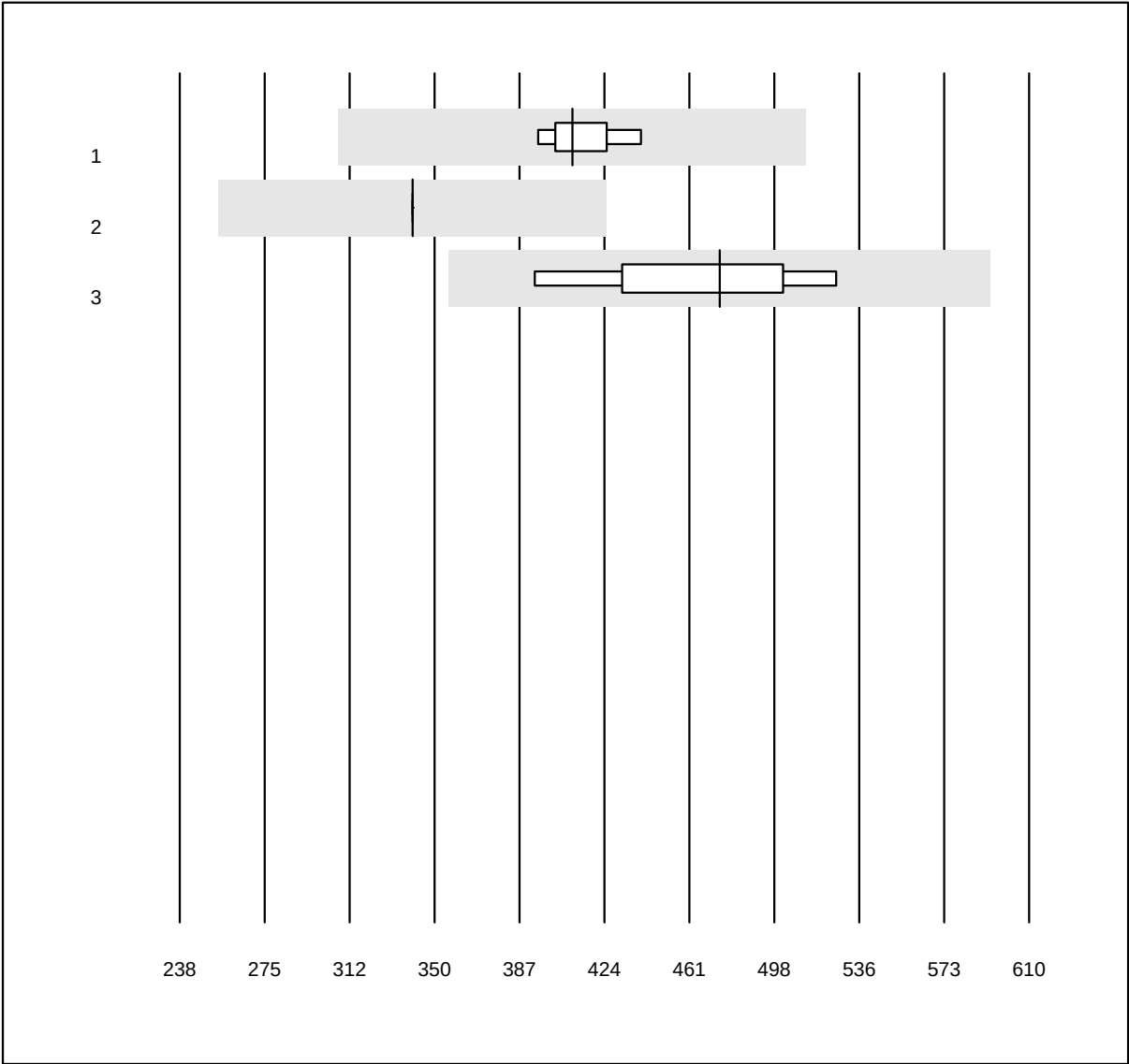


MQ Tolleranz: 25%

Ceruloplasmina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	410.00	3.1	e
2 Roche	5	100.0	0.0	0.0	340.00	0.0	e
3 Siemens	4	100.0	0.0	0.0	474.50	8.0	e*

catene leggere libere kappa

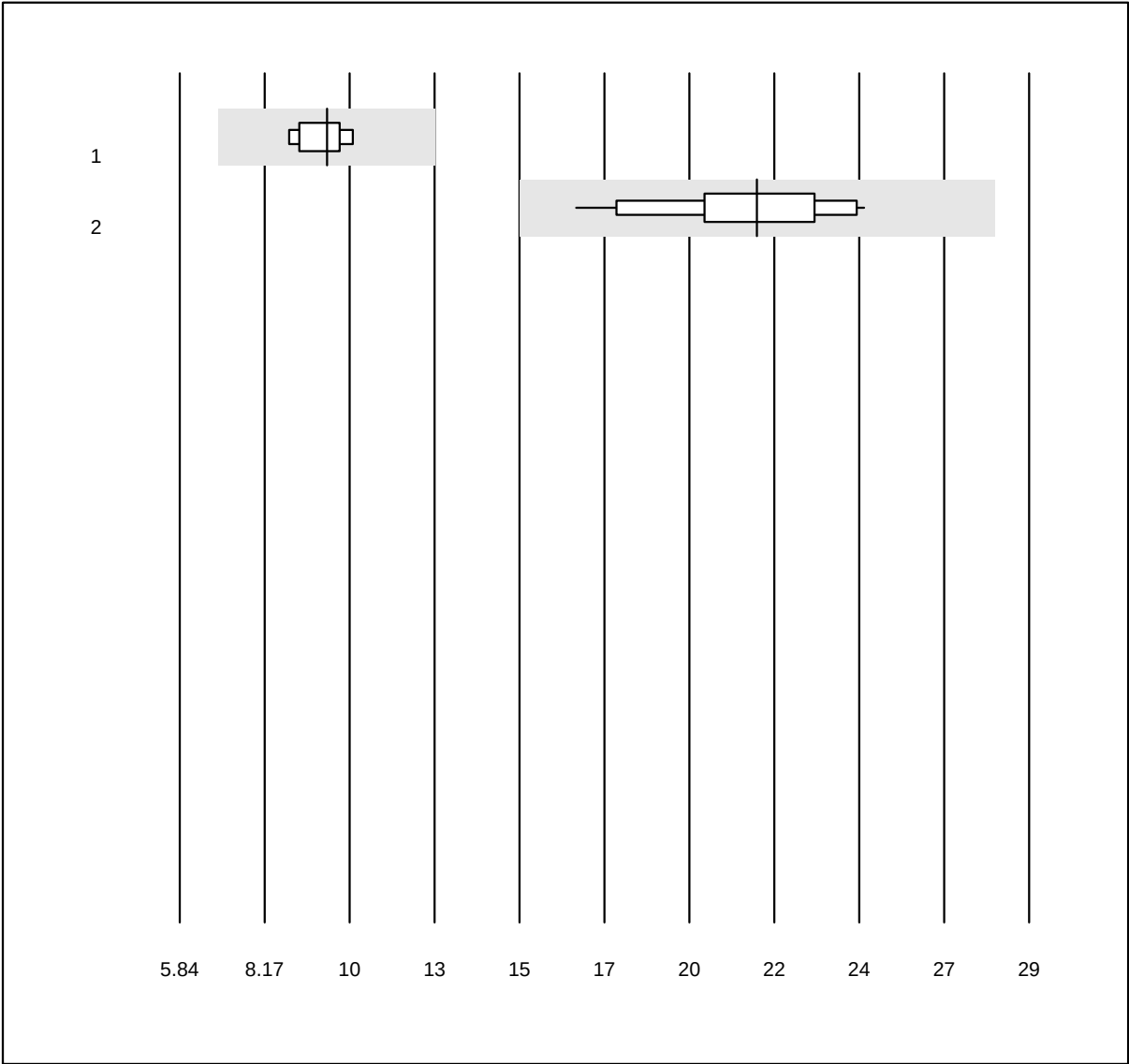


QUALAB Toleranz: 30%

catene leggere libere kappa
(mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 N Latex	7	100.0	0.0	0.0	9.86	6.2	e
2 Freelite	13	100.0	0.0	0.0	21.58	10.0	e

catene leggere libere lambda

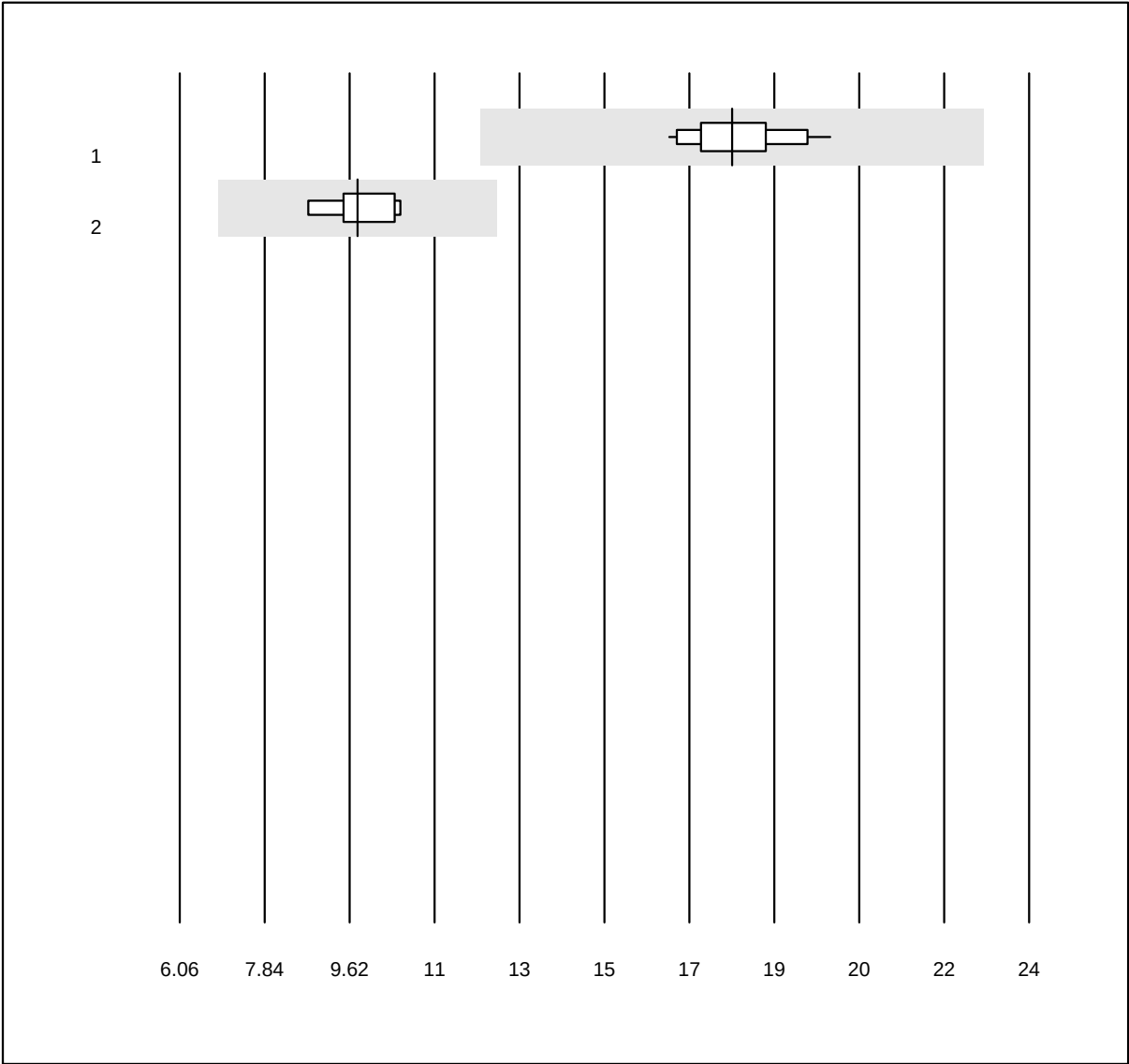


QUALAB Toleranz: 30%

catene leggere libere
lambda (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Freelite	13	100.0	0.0	0.0	17.73	5.3	e
2 N Latex	7	100.0	0.0	0.0	9.82	6.4	e

Aptoglobina

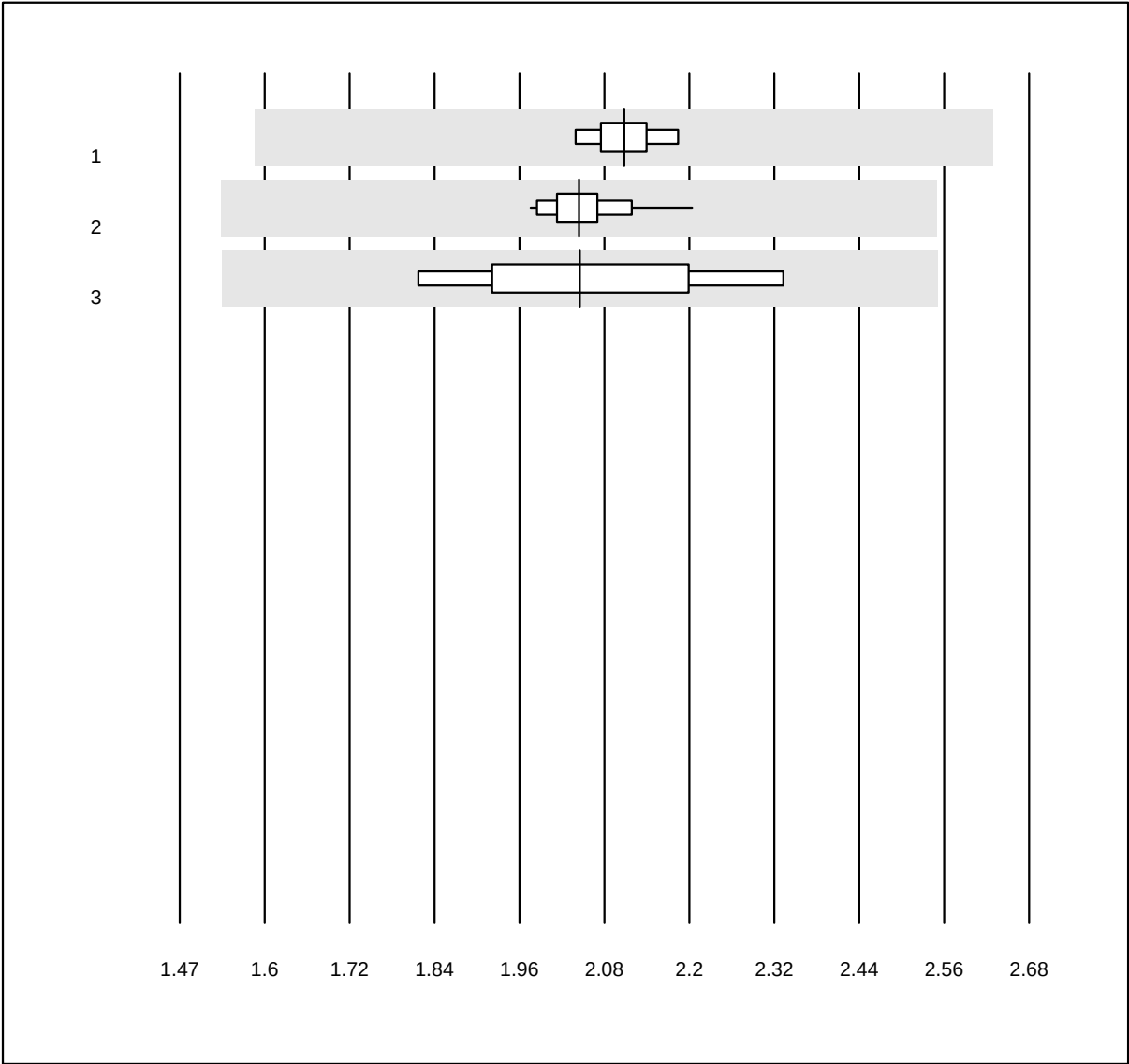


MQ Tolleranz: 25%

Aptoglobina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.10	1.9	e
2 Roche	22	100.0	0.0	0.0	2.04	2.5	e
3 Siemens	4	100.0	0.0	0.0	2.04	7.2	e*

IgA

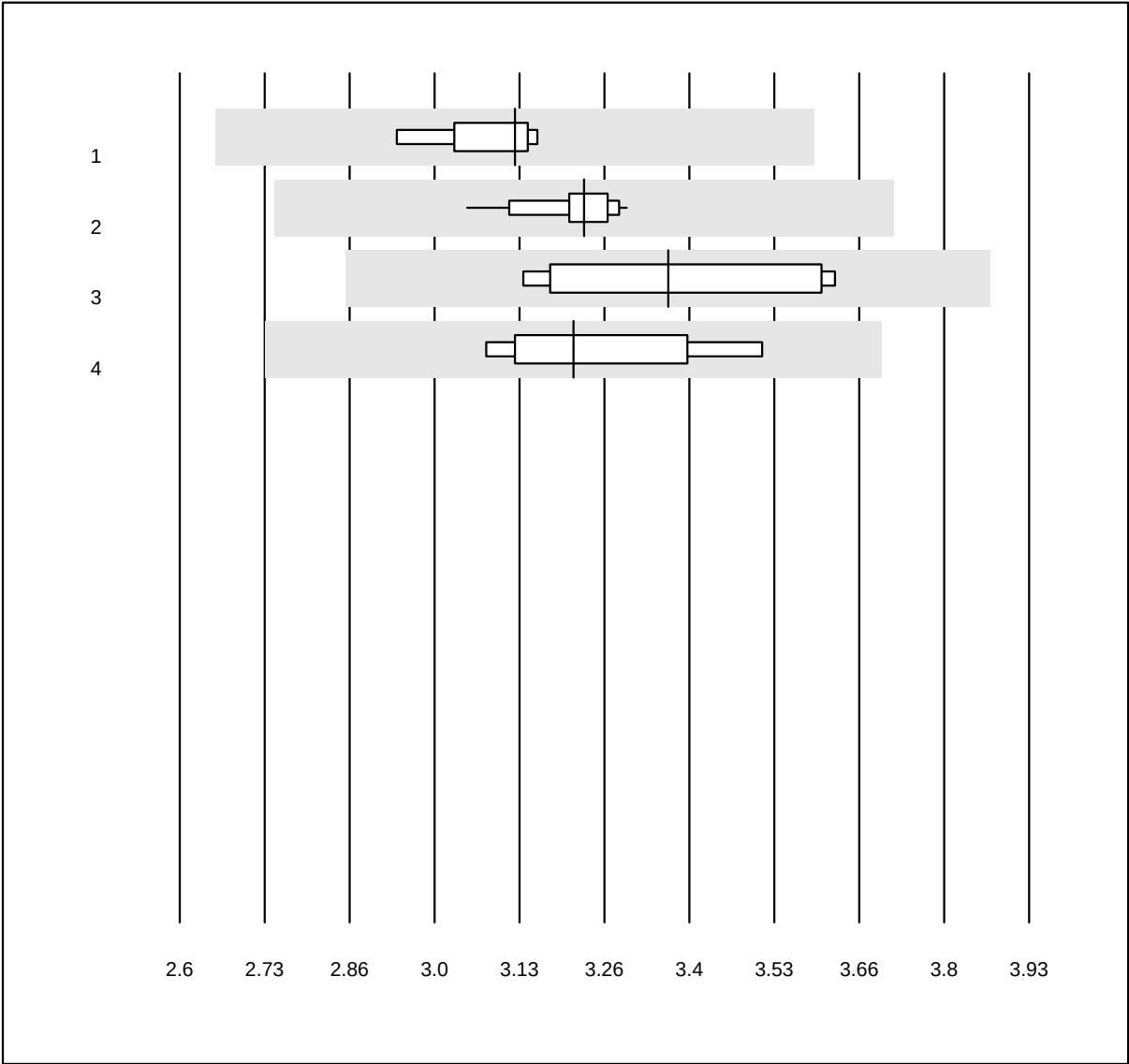


QUALAB Toleranz: 15%

IgA (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	3.13	2.2	e
2 Roche	15	100.0	0.0	0.0	3.23	1.9	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	3.37	5.8	e*
4 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	3.22	4.6	e*

IgE

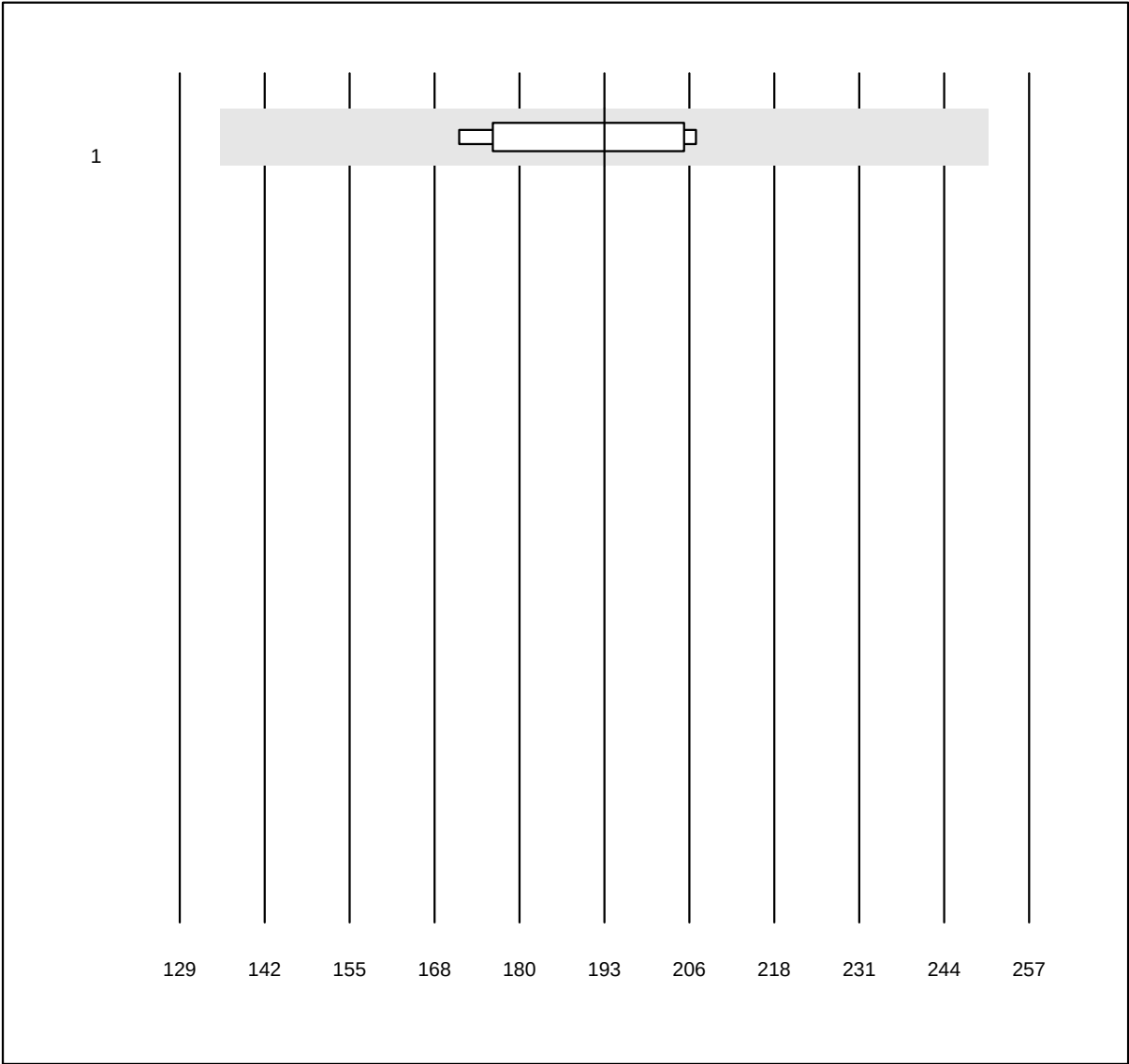


QUALAB Toleranz: 30%

IgE (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	193	7.7	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgG

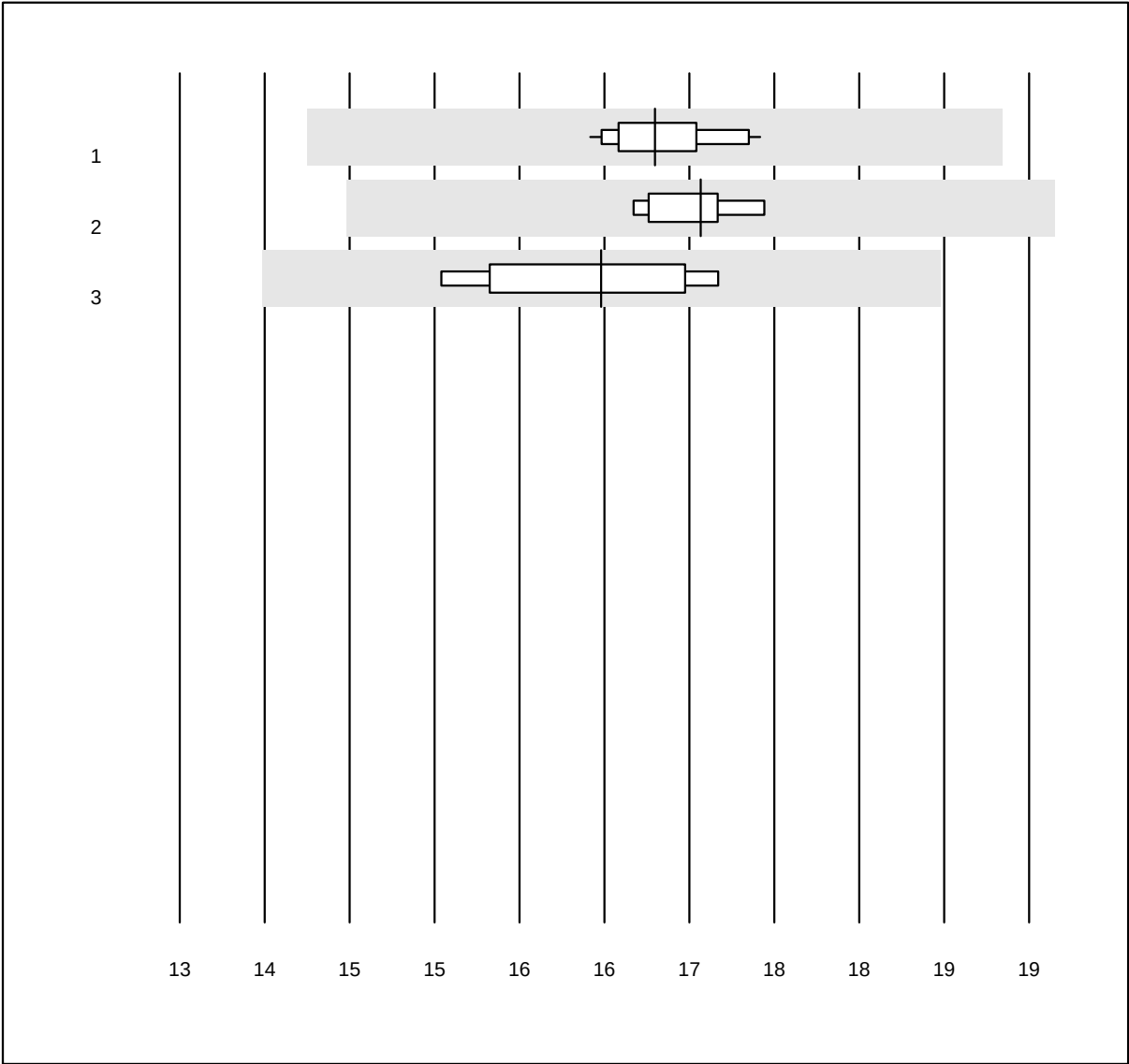


QUALAB Toleranz: 15%

IgG (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	17	100.0	0.0	0.0	16.36	2.1	e
2 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	16.68	1.8	e
3 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	15.98	4.5	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgM

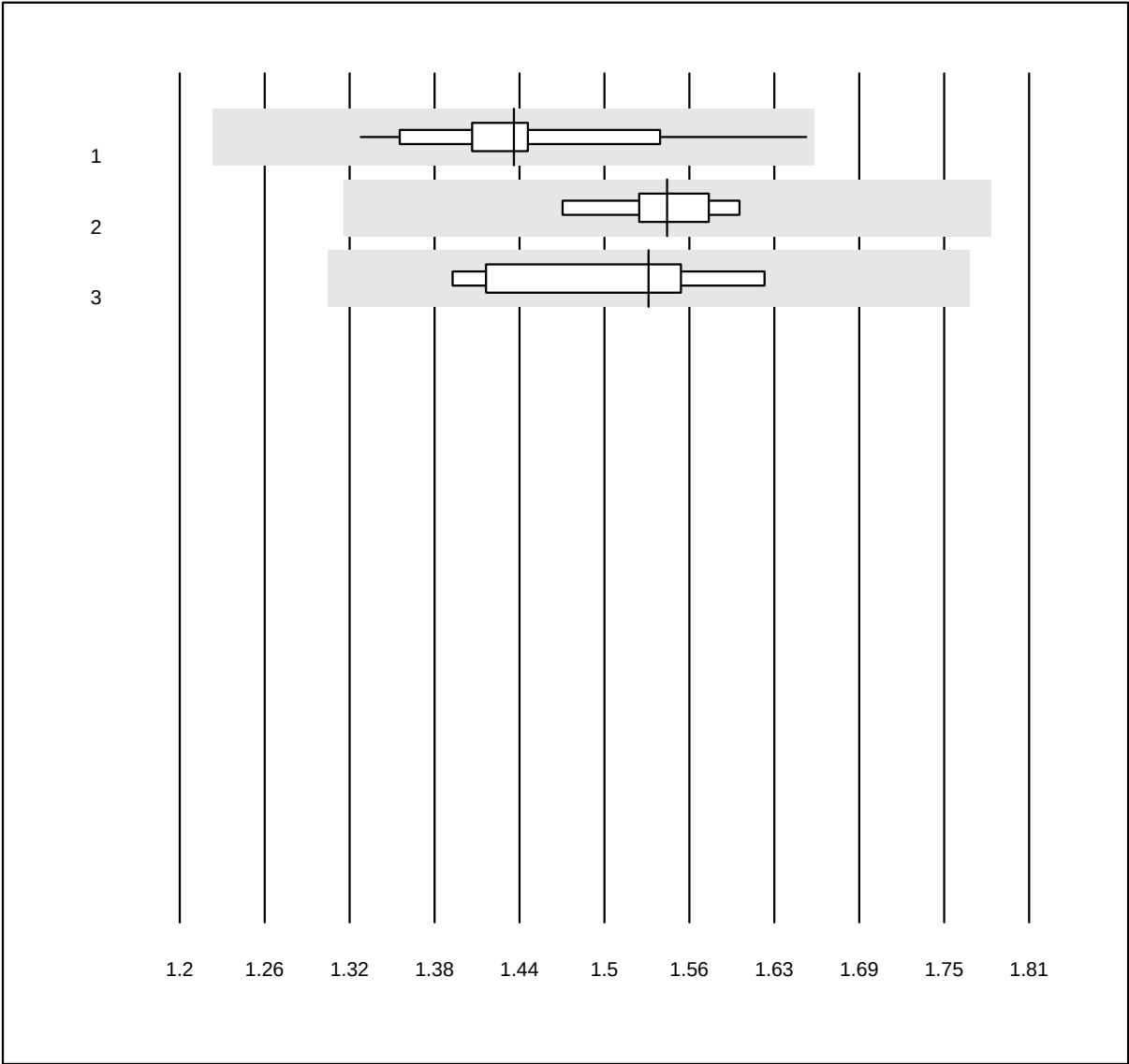


QUALAB Toleranz: 15%

IgM (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	16	100.0	0.0	0.0	1.44	4.8	a
2	Siemens	8	100.0	0.0	0.0	1.55	2.5	e
3	Turbidimetria	7	100.0	0.0	0.0	1.54	5.2	e*

Recettore solubile della transferrina

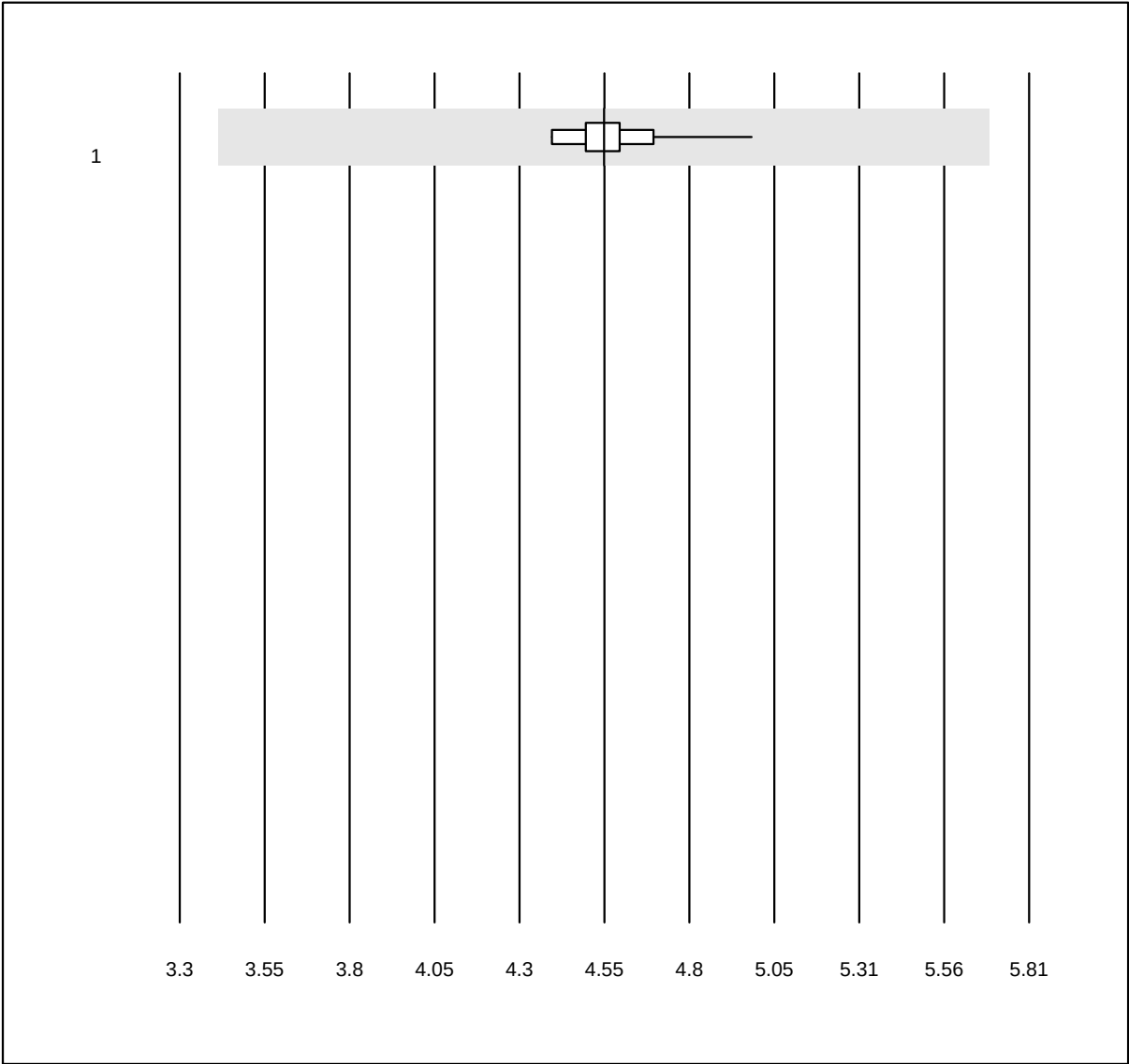


MQ Toleranz: 25%

Recettore solubile della transferrina (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	19	100.0	0.0	0.0	4.6	2.8	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Prealbumina

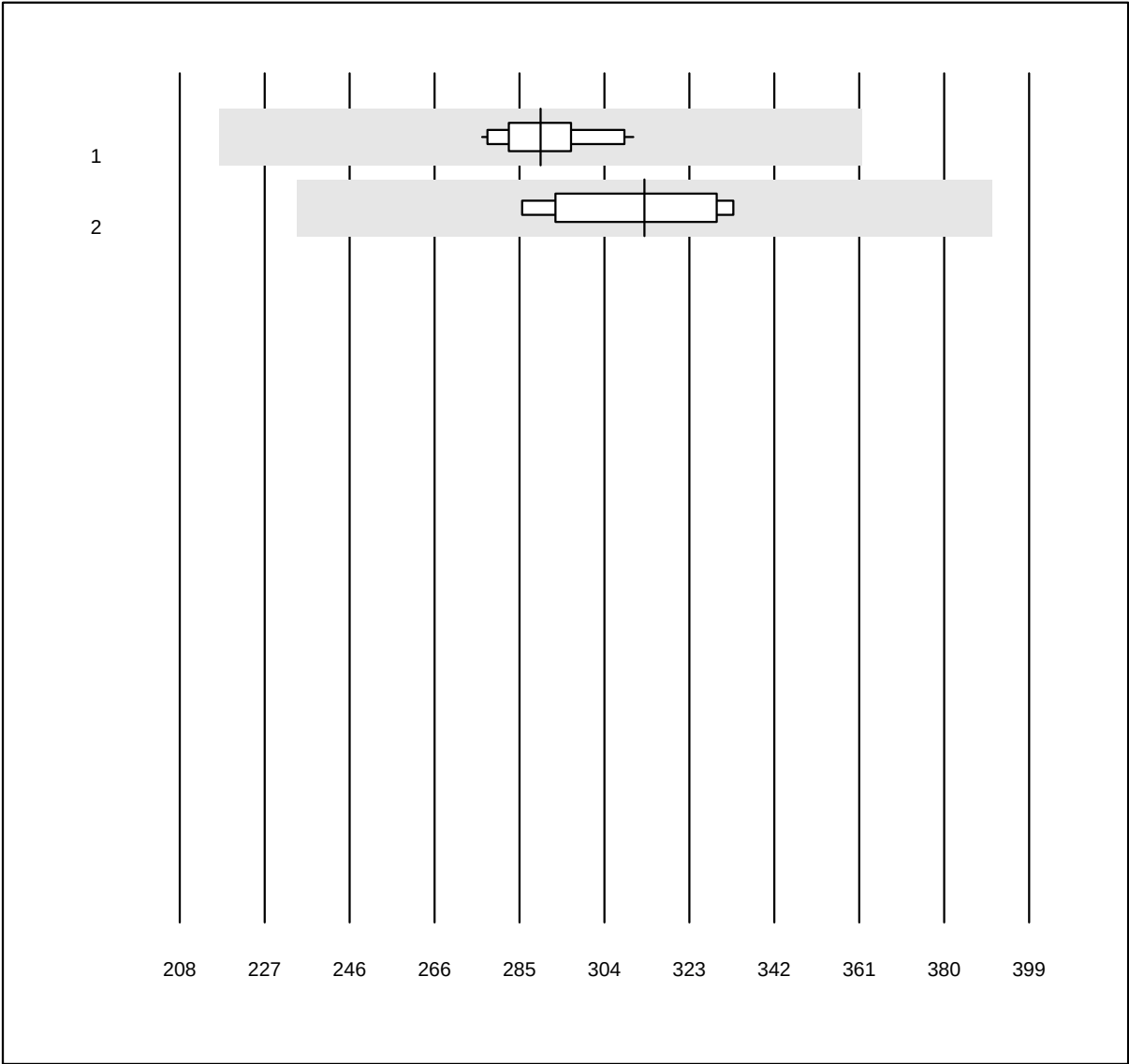


MQ Toleranz: 25%

Prealbumina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	11	100.0	0.0	0.0	289.16	3.4	e
2 Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	312.50	6.2	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Fattore reumatoide

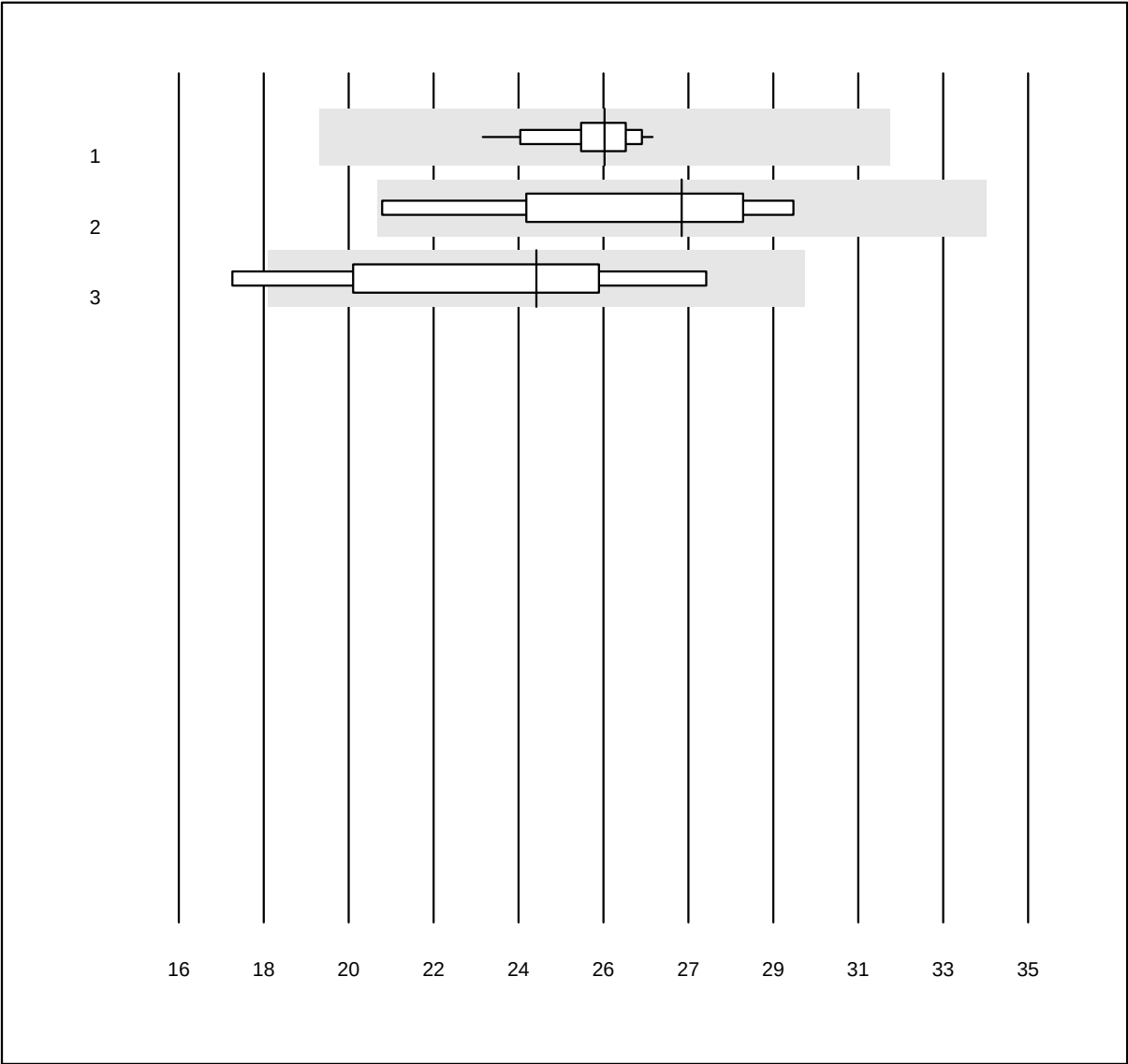


MQ Tolleranz: 25%

Fattore reumatoide (U/ml)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	15	100.0	0.0	0.0	25.5	3.7	e
2 Siemens	4	100.0	0.0	0.0	27.3	10.2	e*
3 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	24.0	13.0	a*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Transferrina

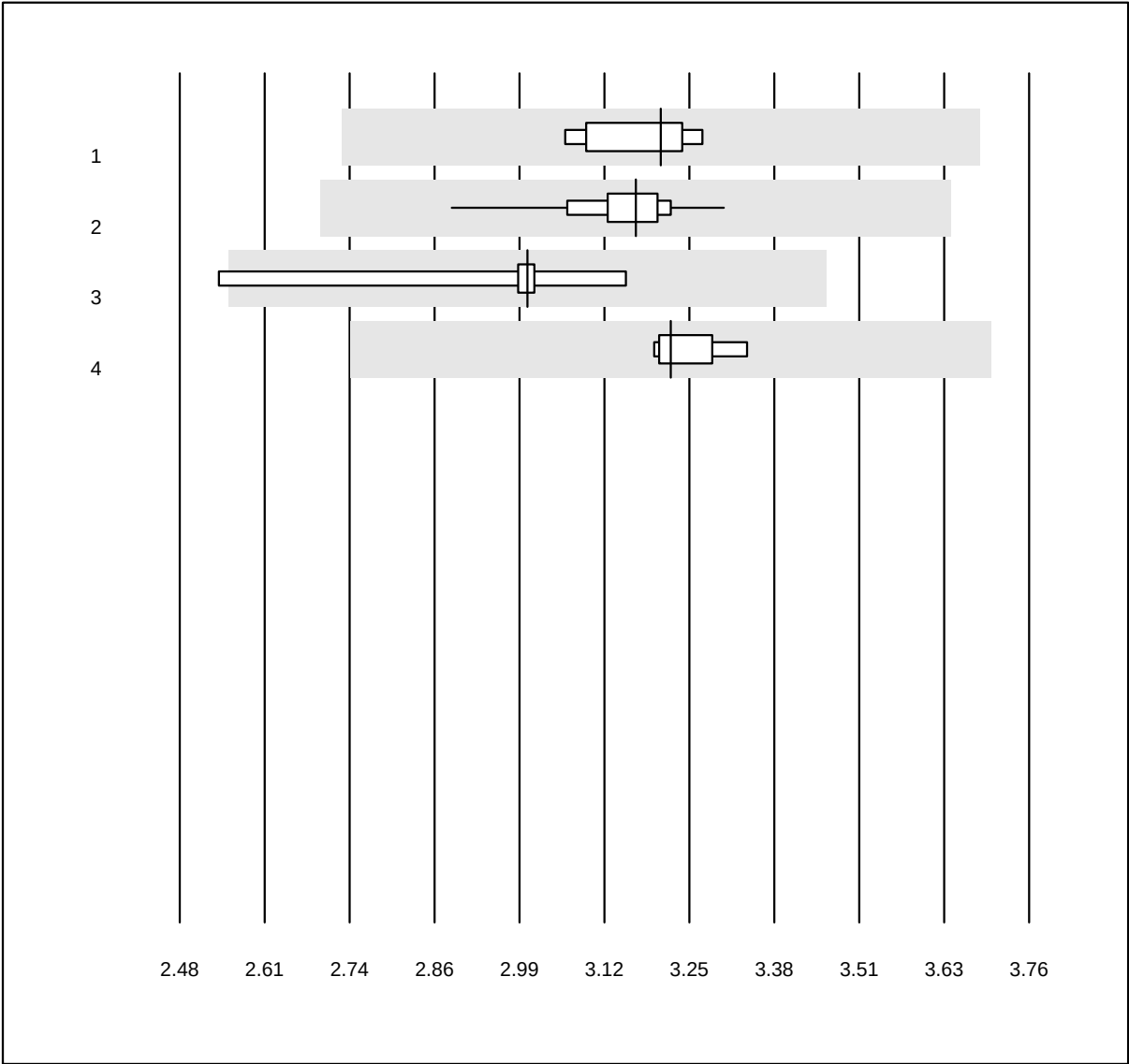


QUALAB Toleranz: 15%

Transferrina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	3.21	2.4	e
2 Roche	29	100.0	0.0	0.0	3.17	2.5	e
3 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	3.00	5.5	e*
4 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	3.22	1.4	e

IgE Betulla, qn

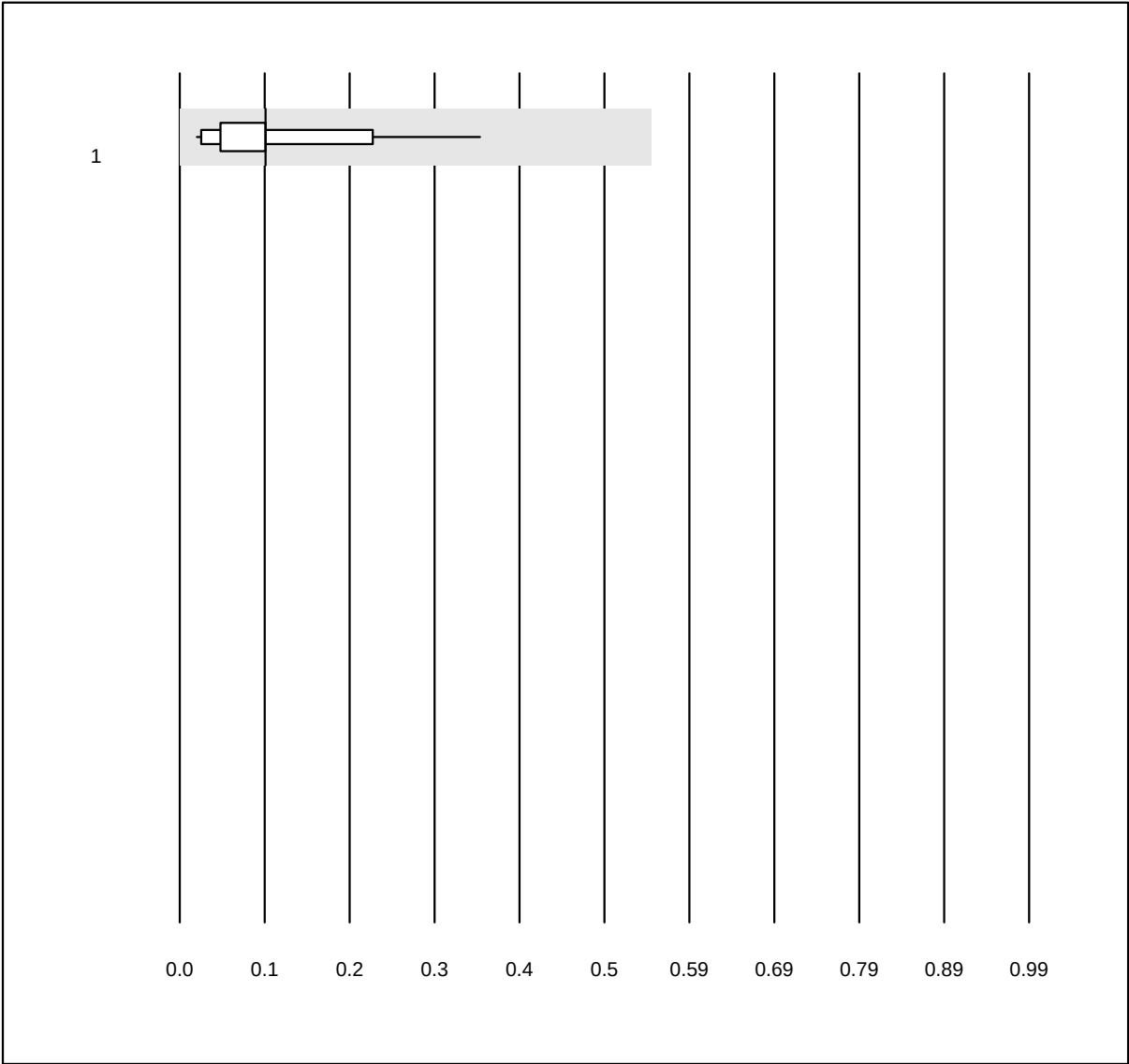


QUALAB Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE Betulla, qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	14	100.0	0.0	0.0	0.10	79.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgE D. pteronyssinus qn

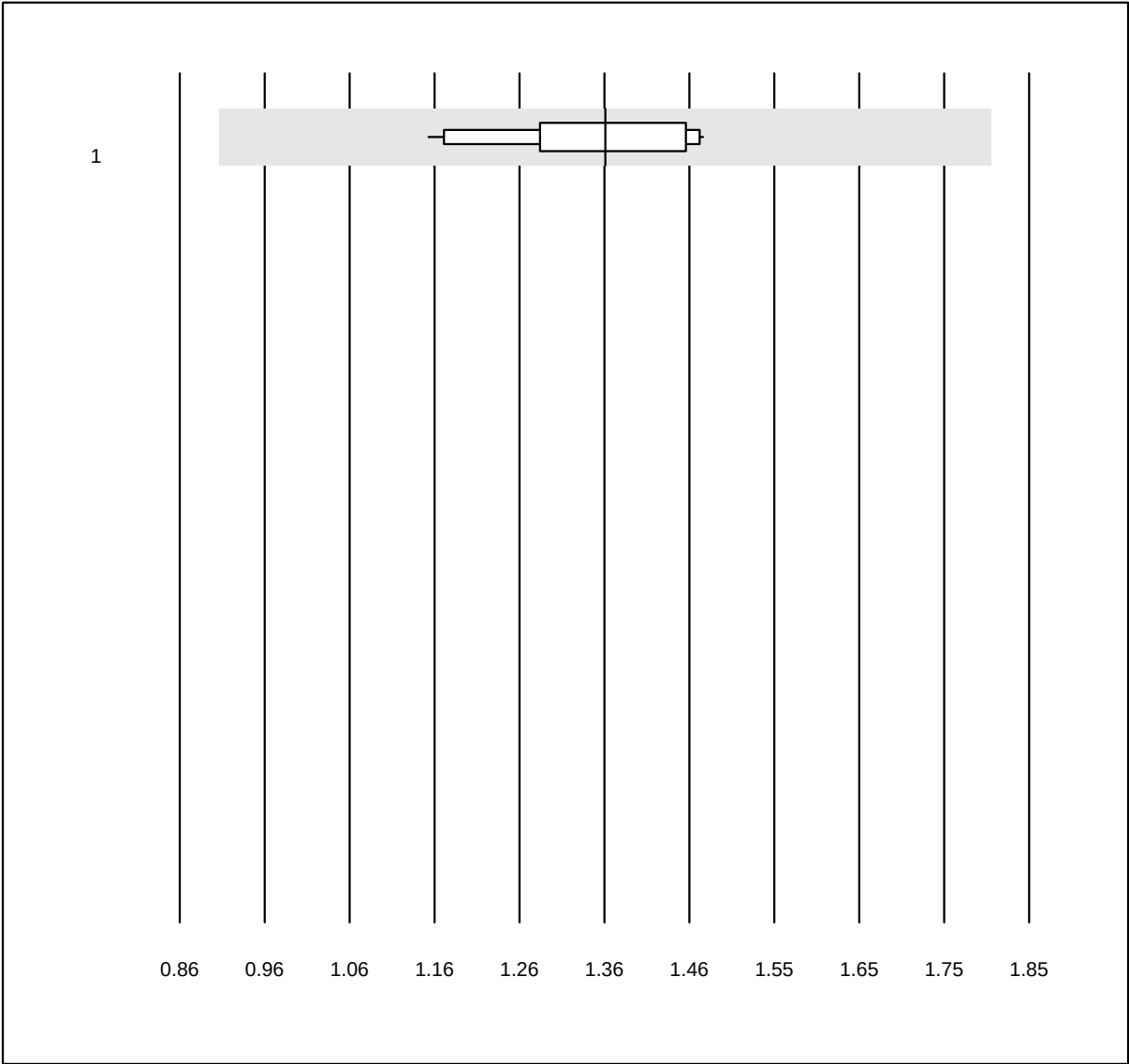


QUALAB Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE D. pteronyssinus qn
(kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	1.36	7.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgE Arachidi qn

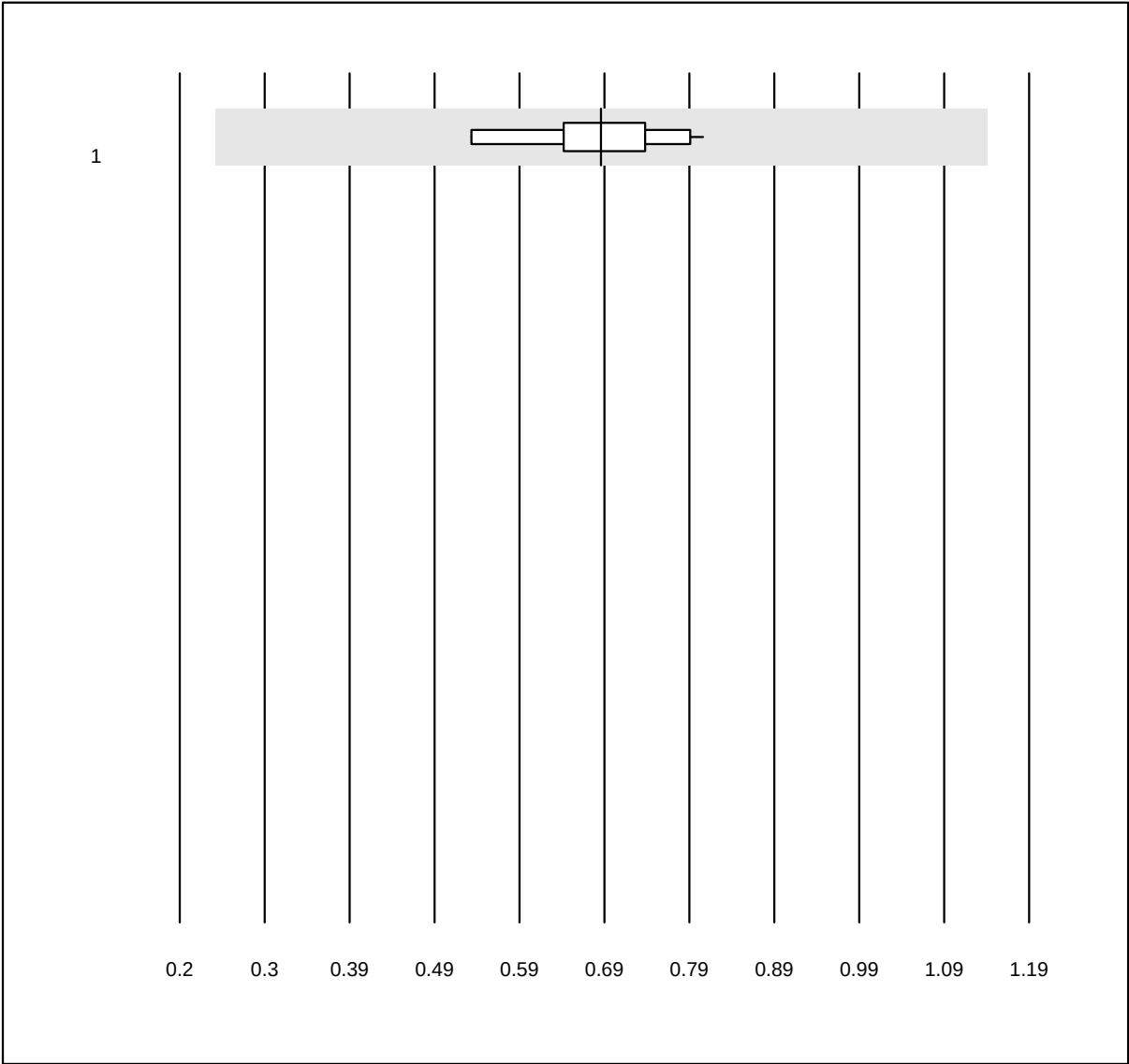


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE Arachidi qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	12	100.0	0.0	0.0	0.69	11.8	e


1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgE Epitelio di gatto, qn

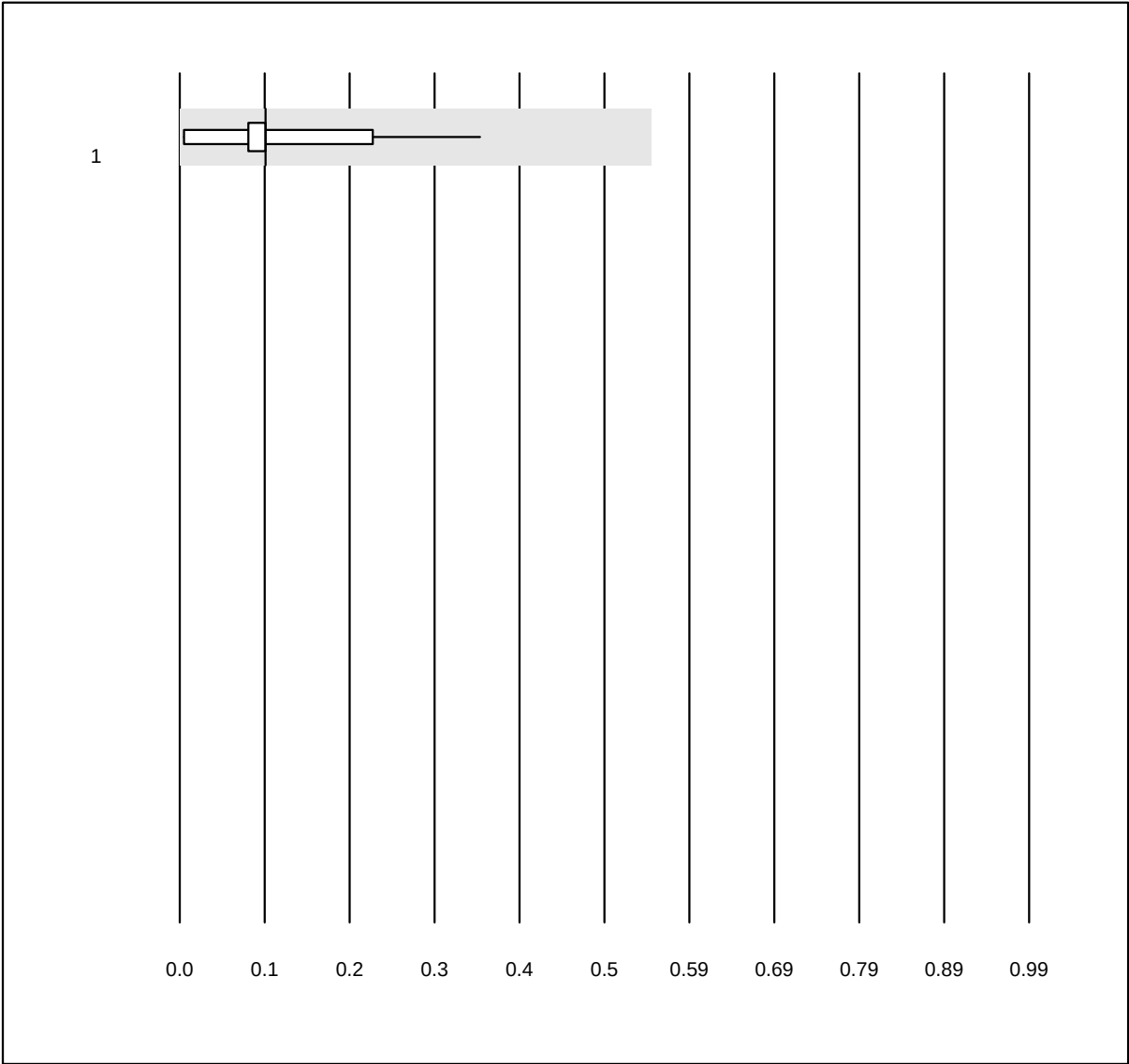

QUALAB Tolleranz: 30% (< 1.5: +/- 0.45 kU/L)		IgE Epitelio di gatto, qn (kU/L)					
No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Tutti i metodi	14	100.0	0.0	0.0	0.10	83.0	e
1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)							

IgE fx5 qn

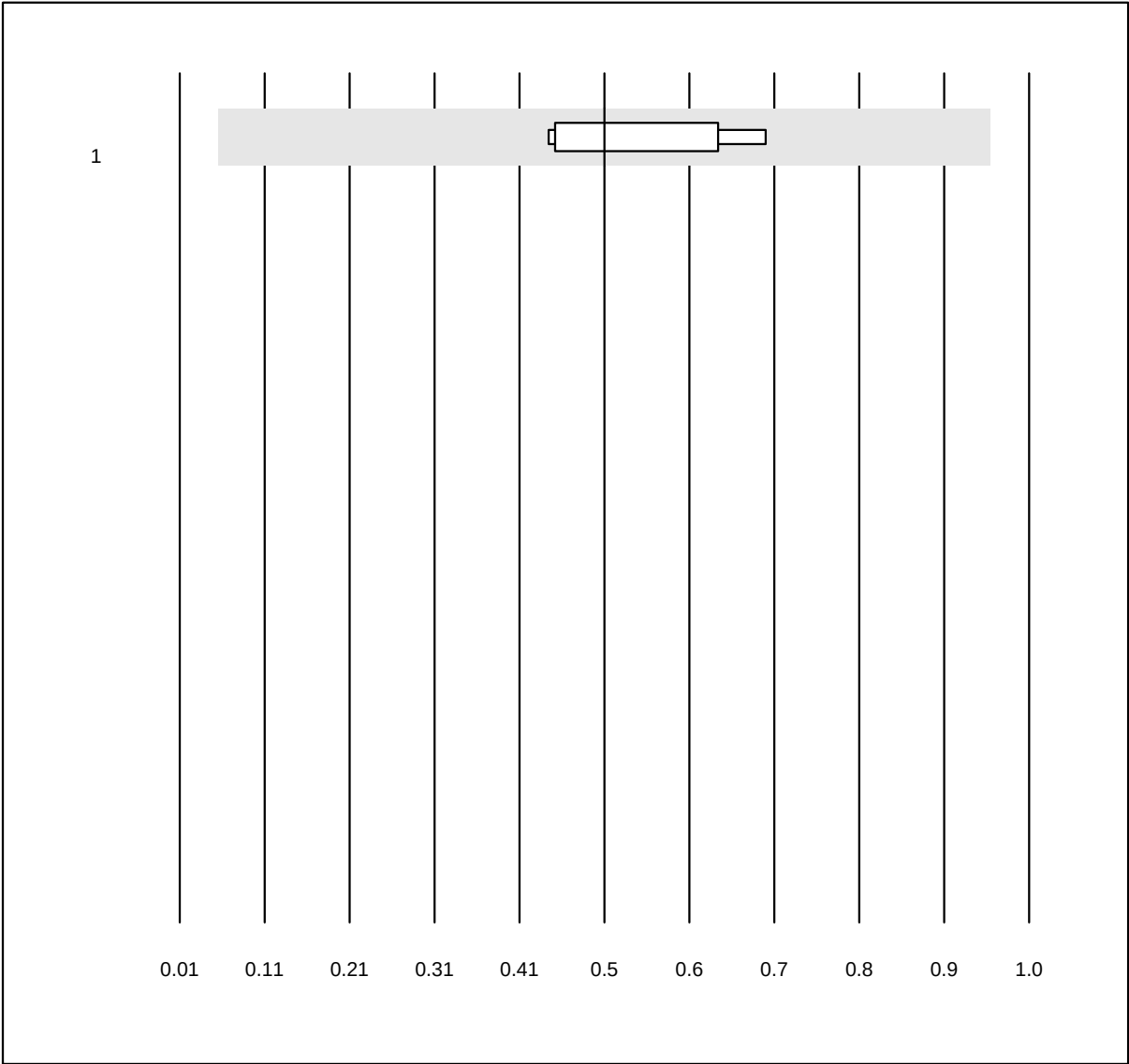


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE fx5 qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	8	100.0	0.0	0.0	0.51	18.3	e

IgE rx1qn

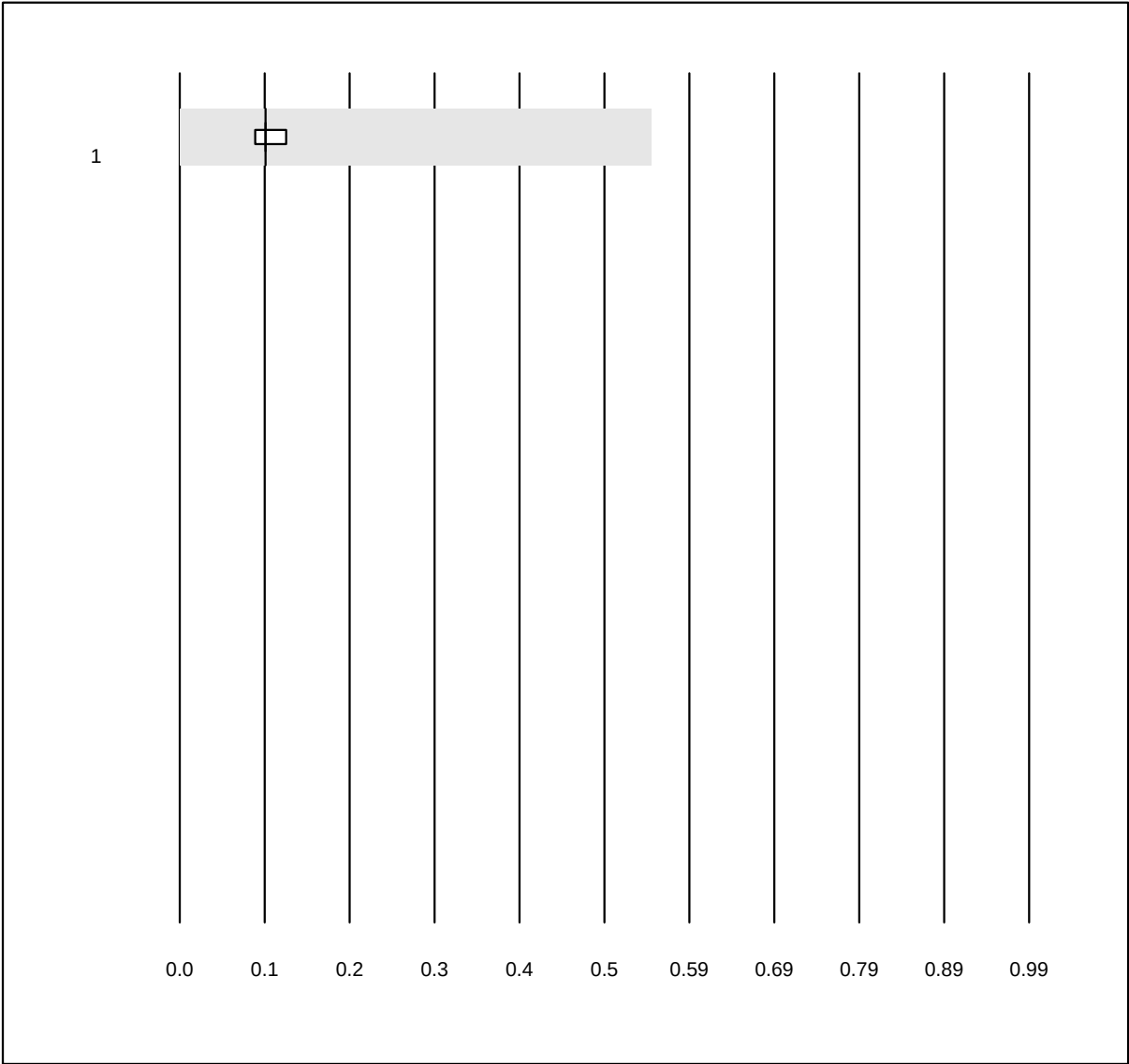


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE rx1qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	7	100.0	0.0	0.0	0.10	8.9	e

IgE rx2 qn

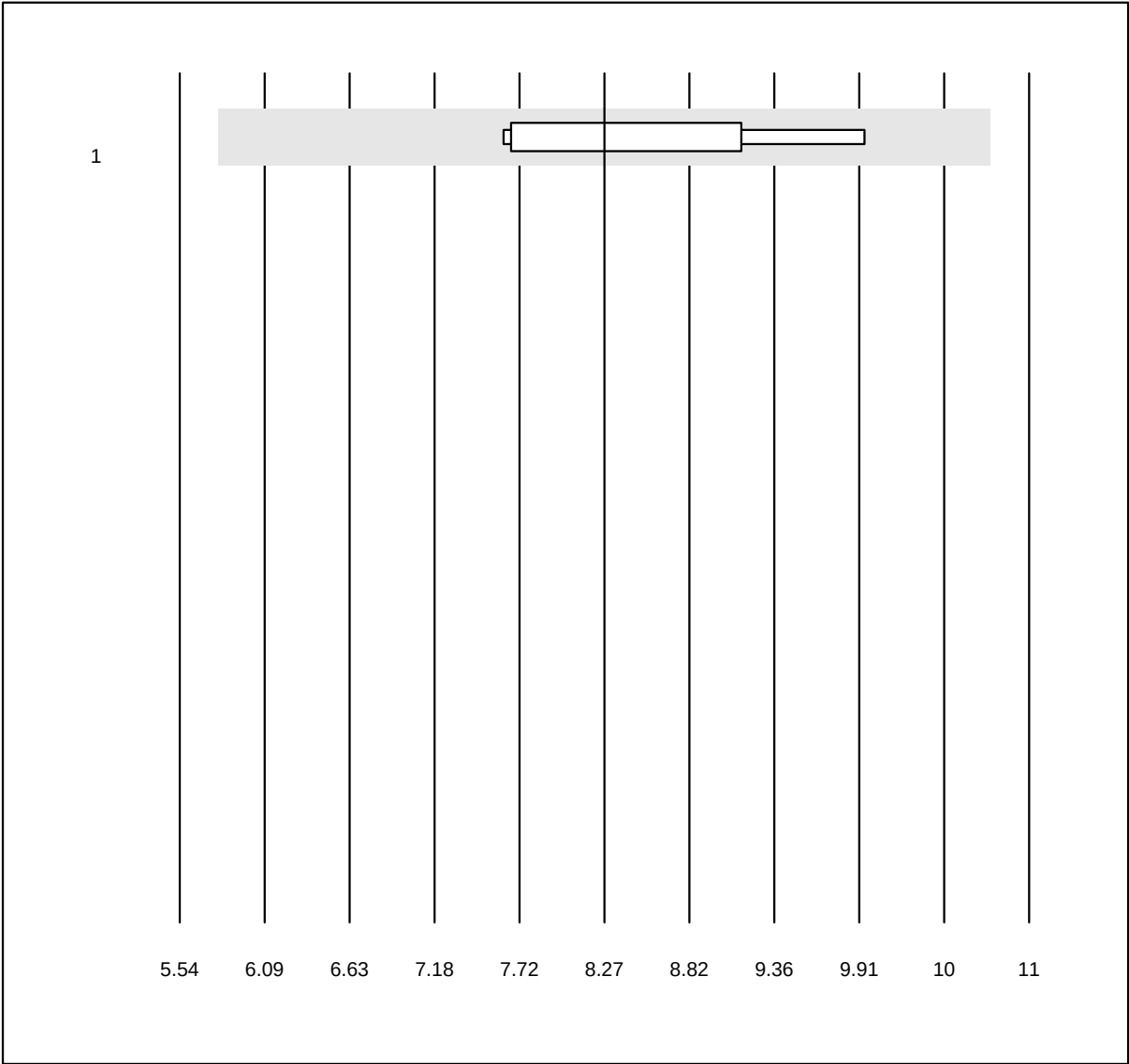


MQ Toleranz: 30%

IgE rx2 qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	7	100.0	0.0	0.0	8.27	10.1	e*

IgE sx1 qn

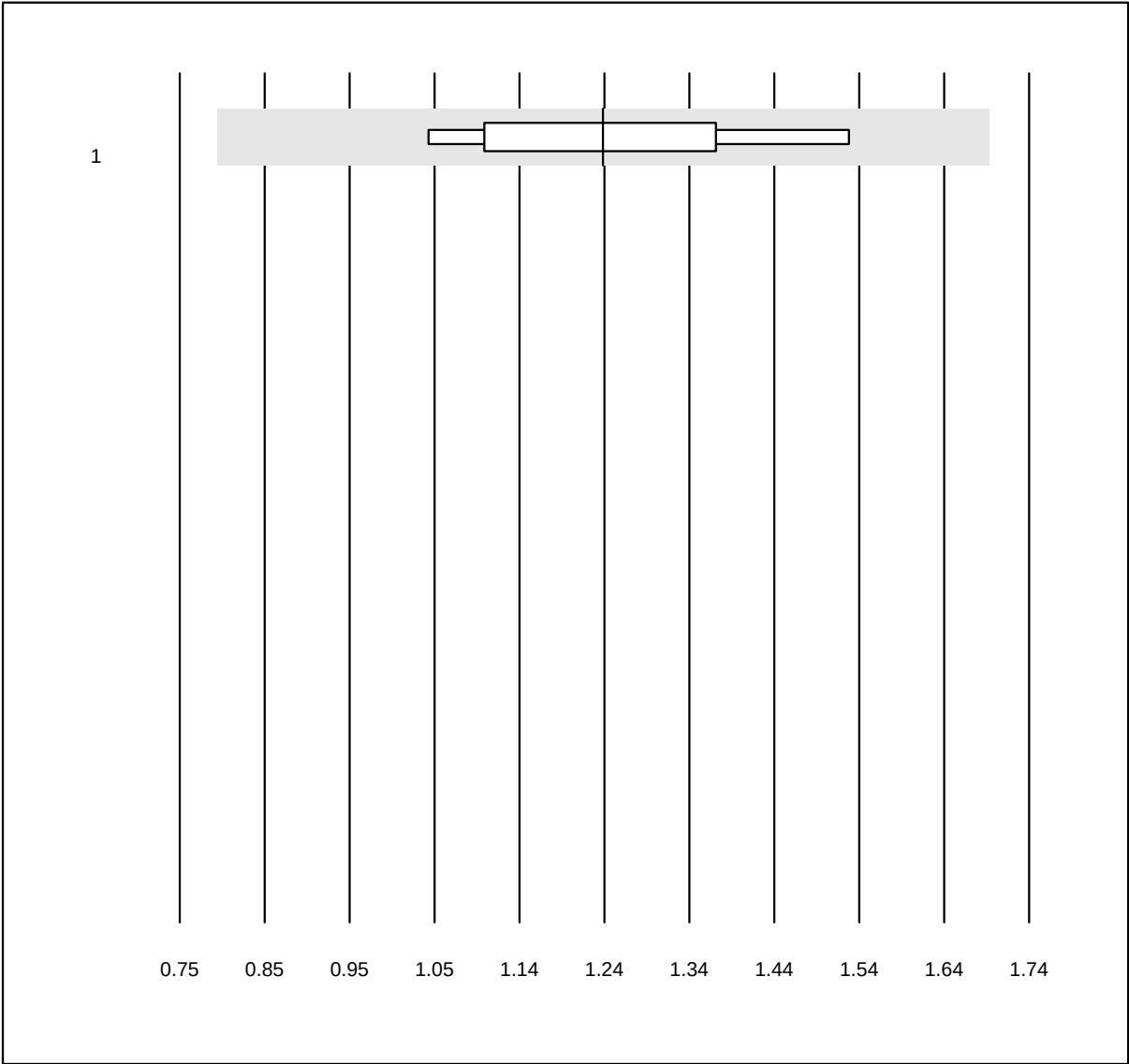


MQ Toleranz: 30%
(< 1.5: +/- 0.45 kU/L)

IgE sx1 qn (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	9	100.0	0.0	0.0	1.24	12.9	e

IgE totale

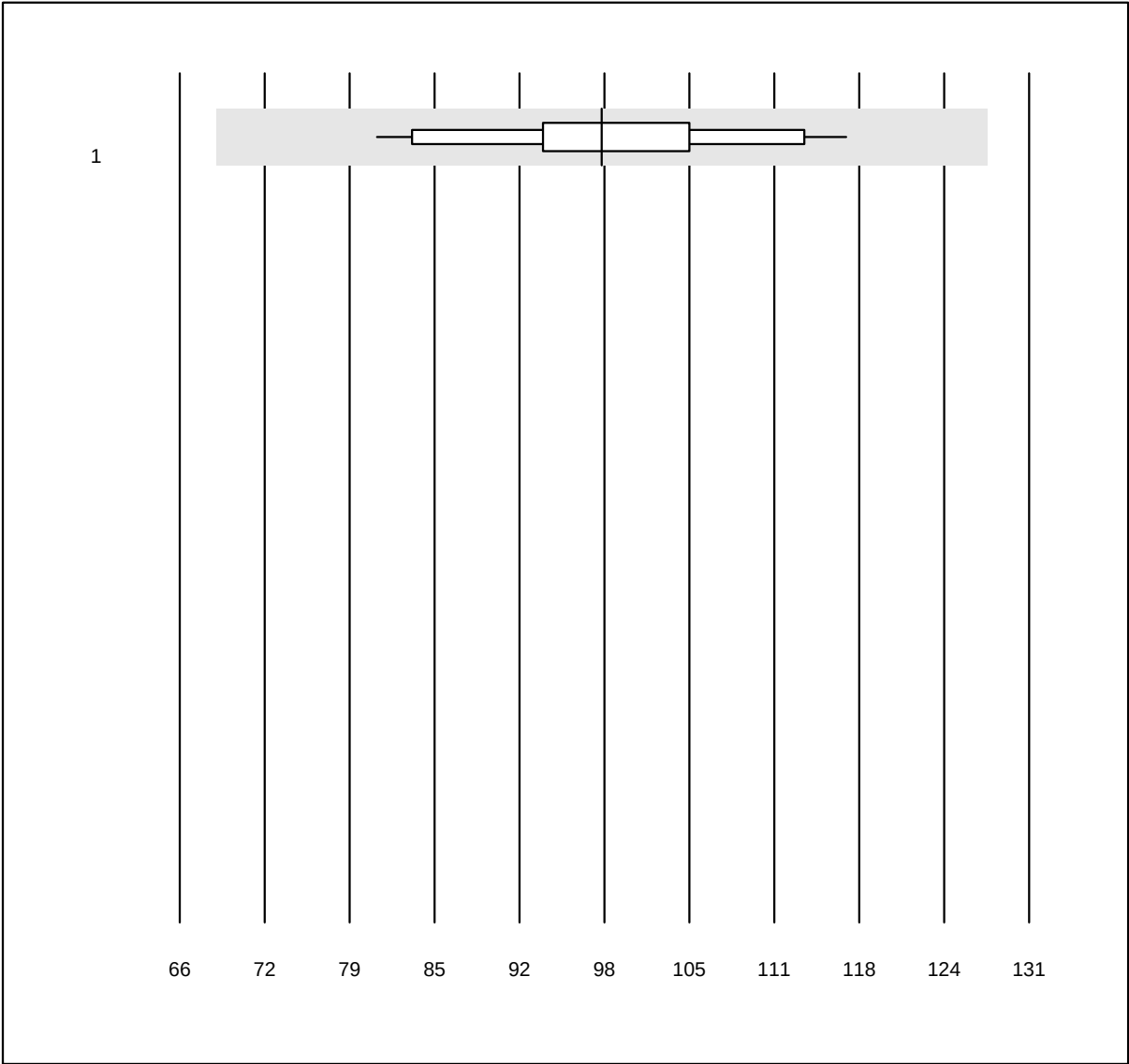


QUALAB Toleranz: 30%

IgE totale (kU/L)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	13	100.0	0.0	0.0	98	9.5	e

CRP HS

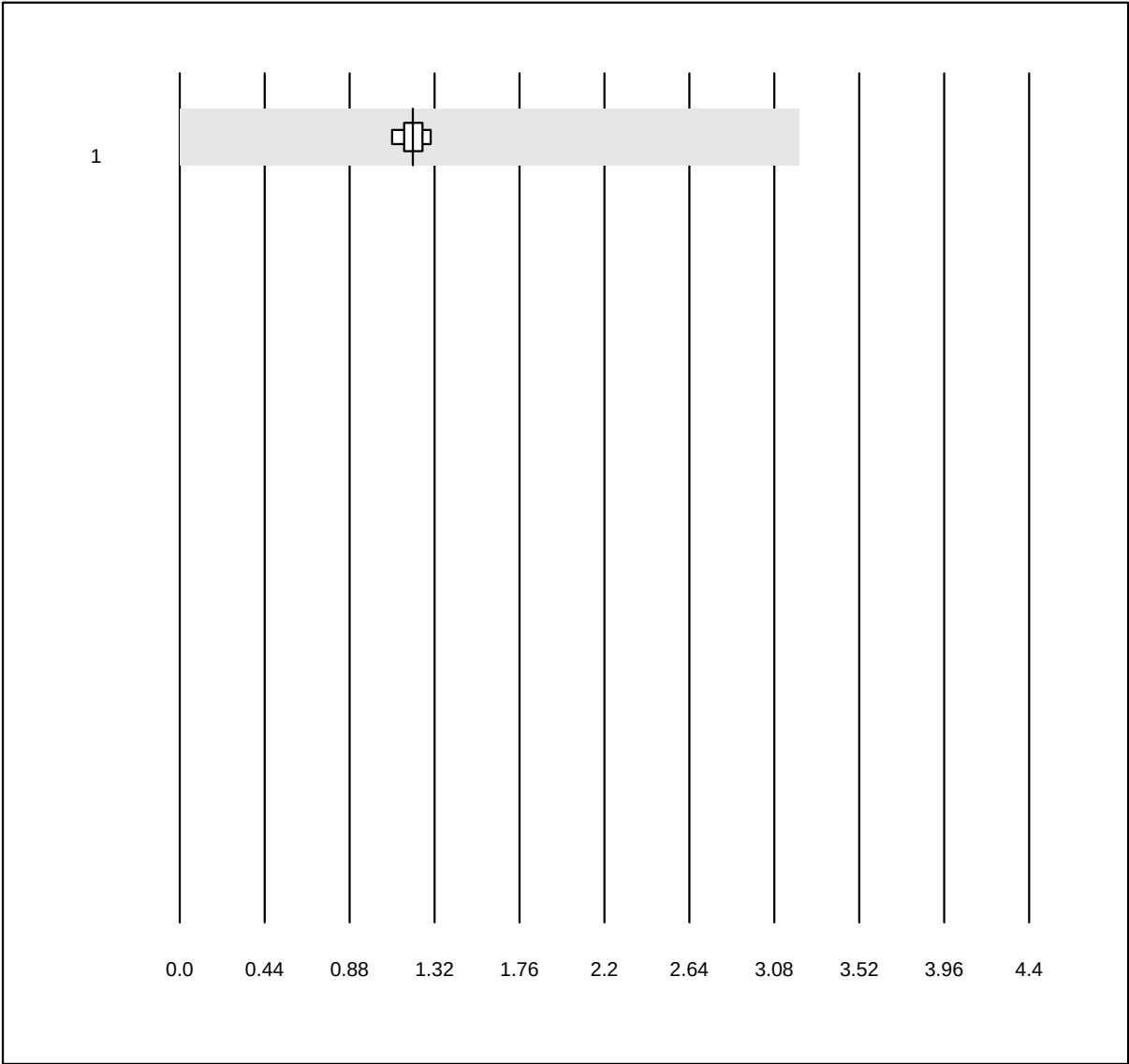


QUALAB Toleranz: 21%
(< 10.0: +/- 2.0 mg/l)

CRP HS (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Turbidimetria	12	100.0	0.0	0.0	1.21	5.5	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Apolipoproteina A1

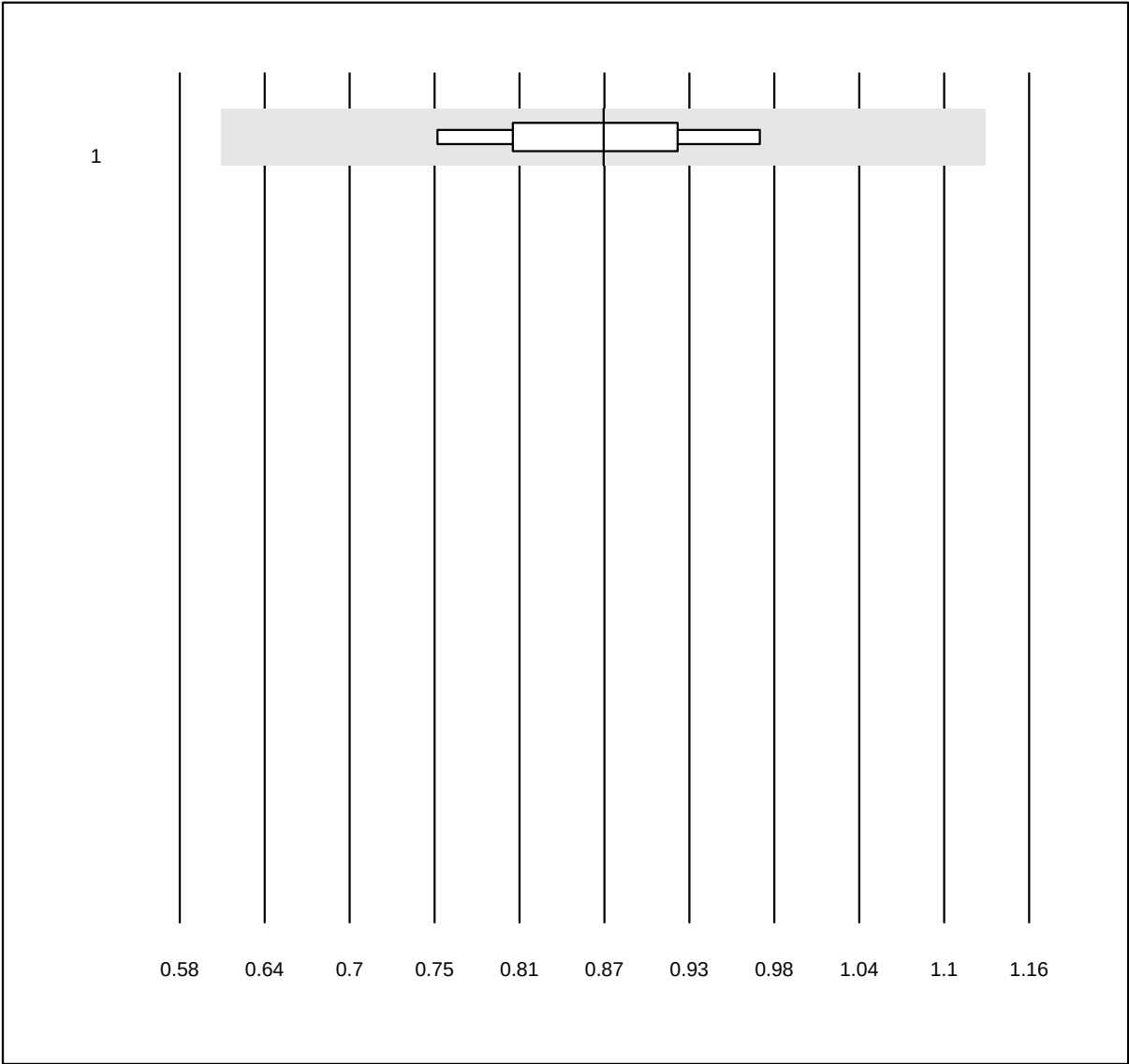


MQ Toleranz: 30%

Apolipoproteina A1 (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	0.87	8.0	e

Apolipoproteina B

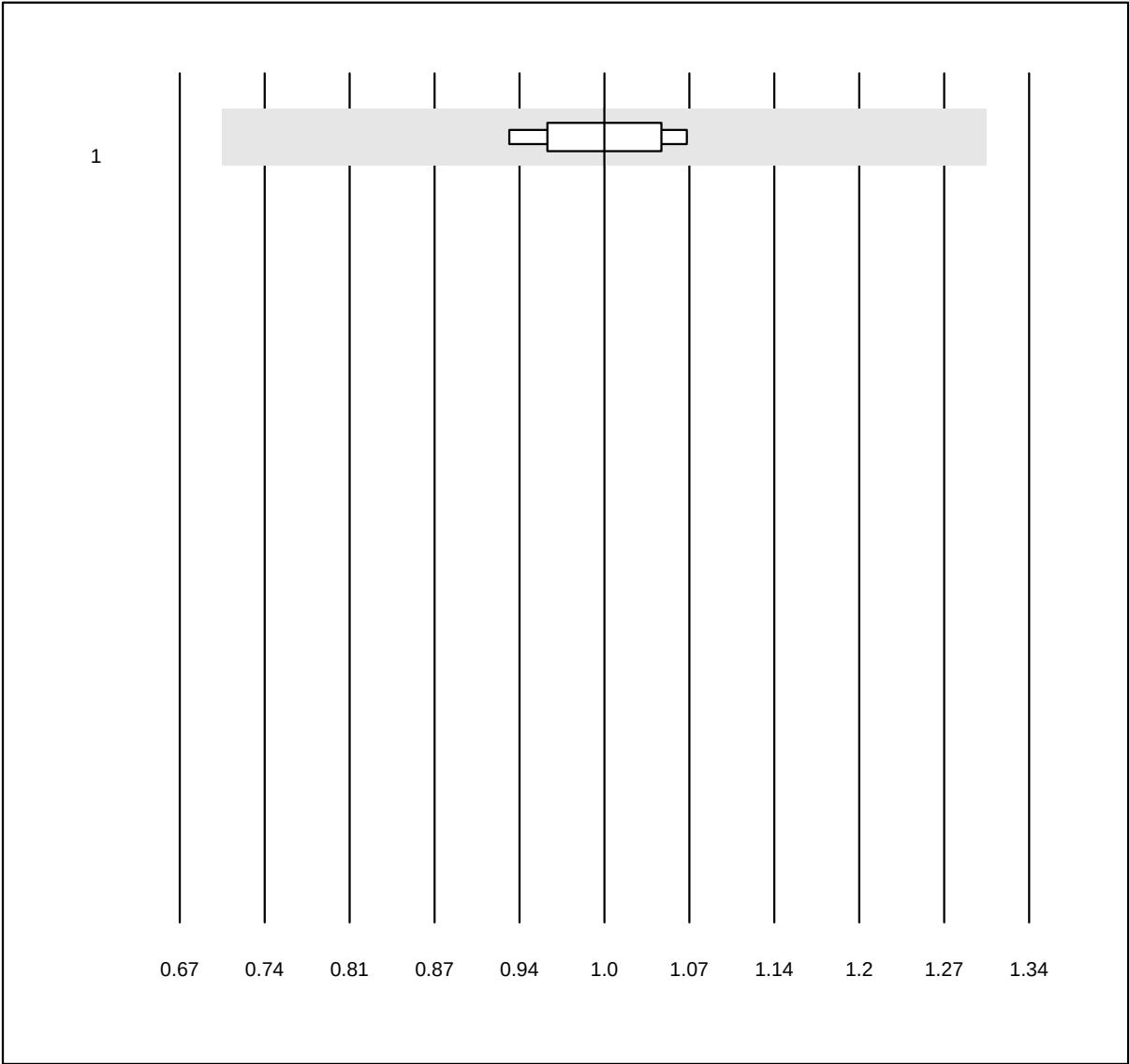


MQ Toleranz: 30%

Apolipoproteina B (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	9	100.0	0.0	0.0	1.00	5.0	e

Lipoproteina (a)

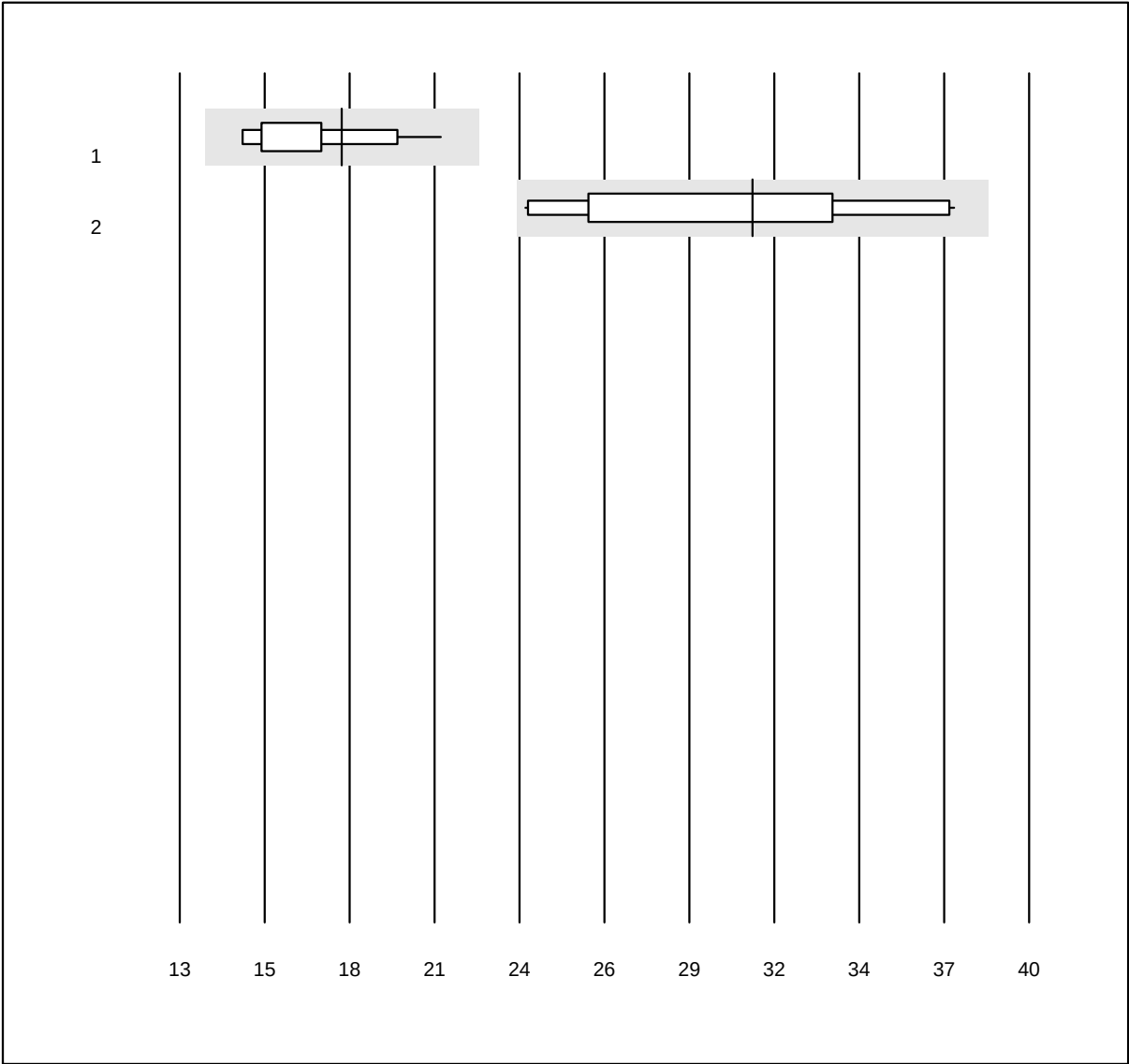


QUALAB Toleranz: 24%

Lipoproteina (a) (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	15	100.0	0.0	0.0	18	10.0	a
2 Altri	10	100.0	0.0	0.0	31	15.8	a*

CRP

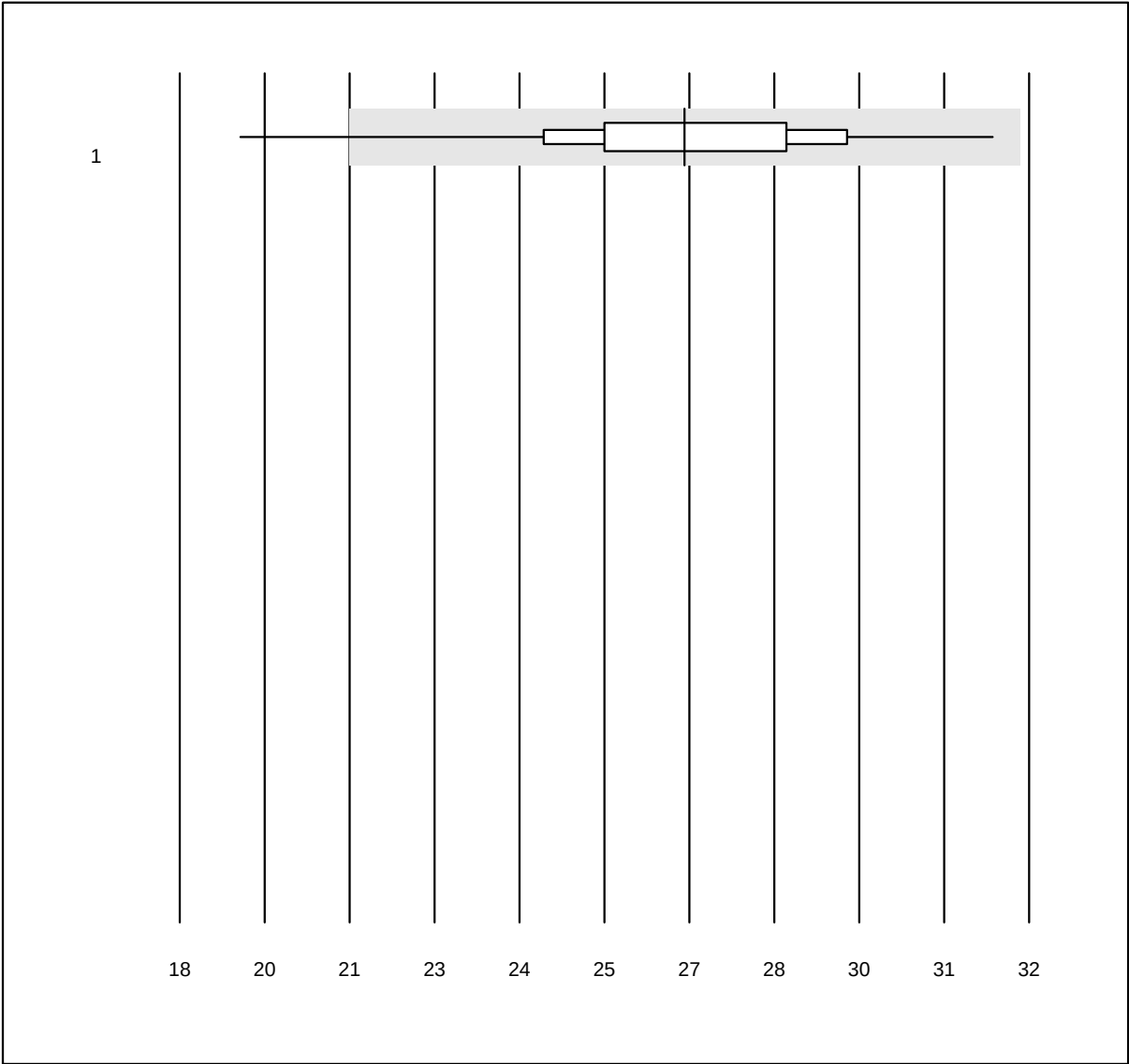


QUALAB Toleranz: 21%

CRP (mg/l)


No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	AFIAS	239	98.3	0.4	1.3	26.3	7.5	e

IgA anti gliadina deam.

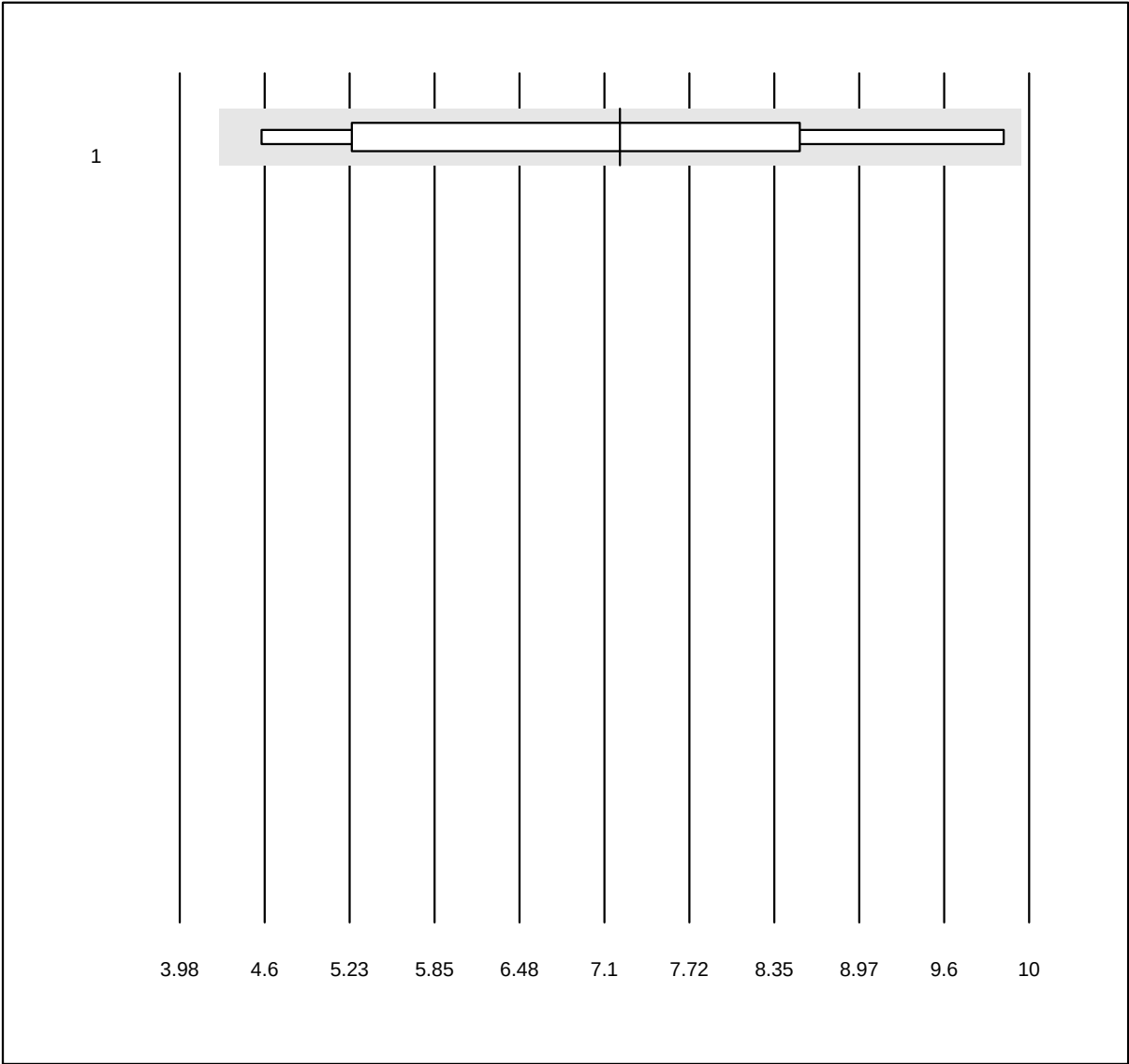

MQ Toleranz: 40%		IgA anti gliadina deam. (U/ml)						
No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Phadia	8	100.0	0.0	0.0	7.10	25.3	a*
1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)								

IgG anti gliadina deam.

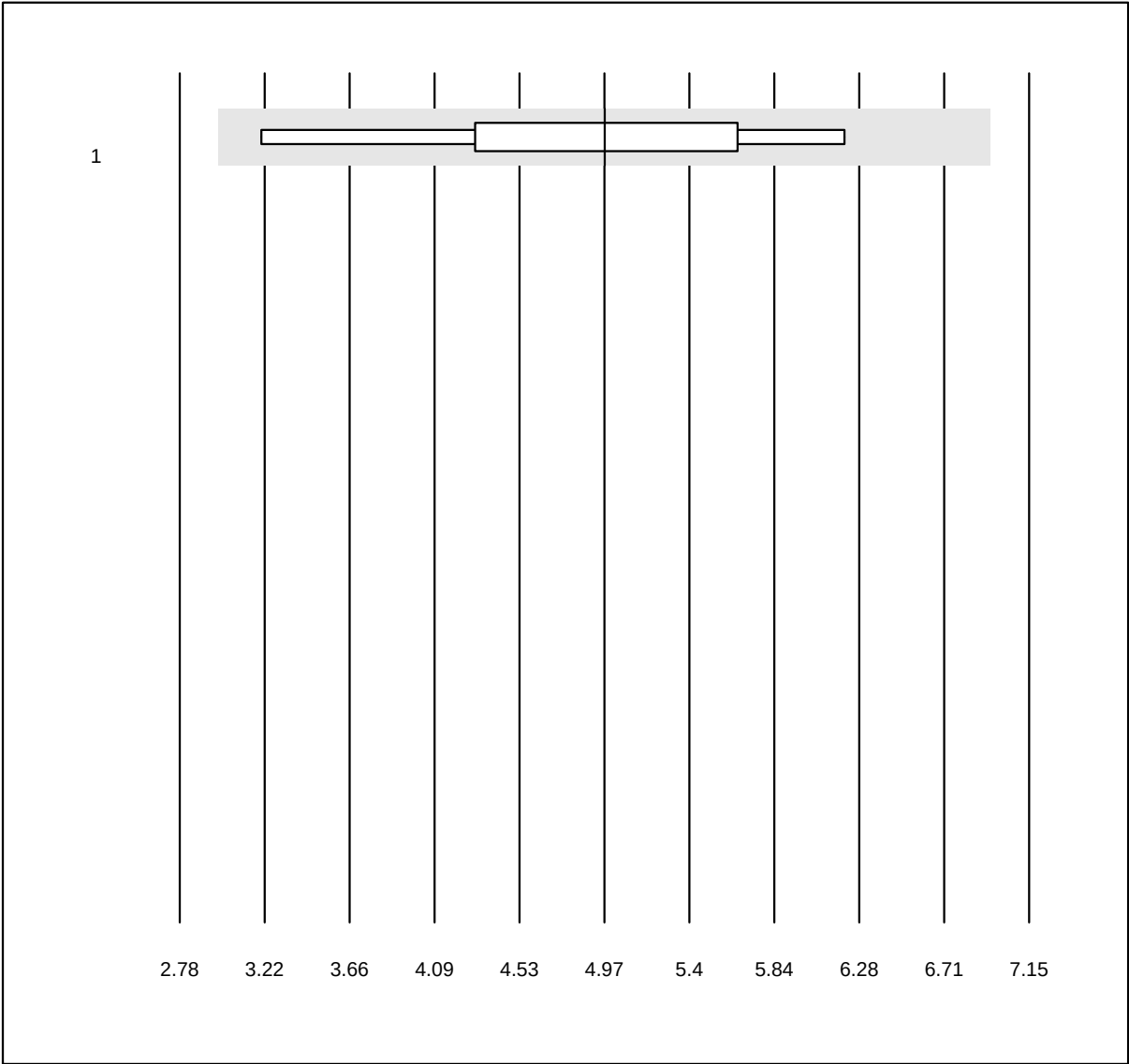


MQ Toleranz: 40%

IgG anti gliadina deam.
(U/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Phadia	9	100.0	0.0	0.0	4.97	18.6	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgA anti tTG

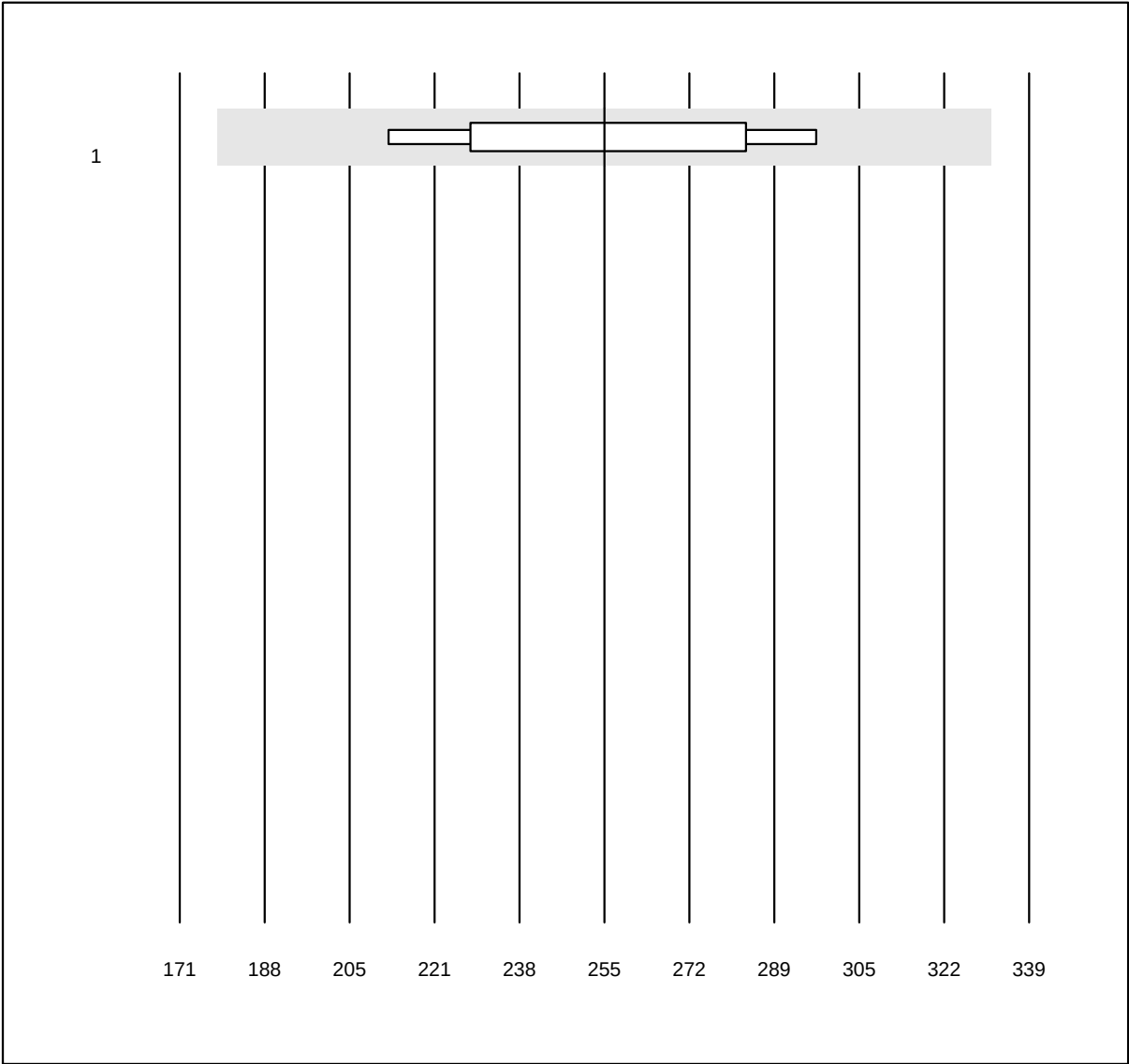


MQ Toleranz: 30%

IgA anti tTG (U/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Phadia	8	100.0	0.0	0.0	255.00	11.4	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IgG anti tTG

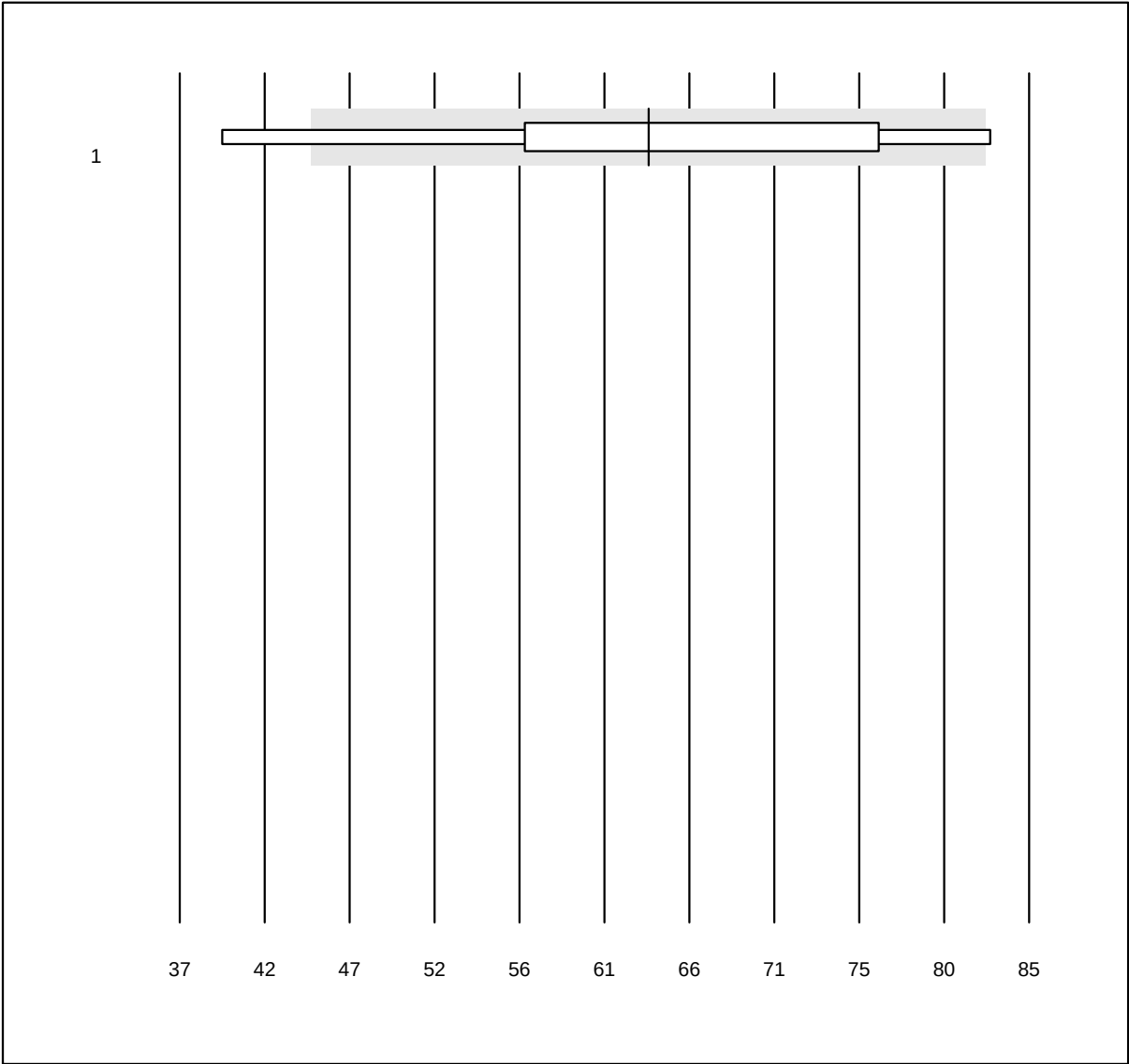


MQ Toleranz: 30%

IgG anti tTG (U/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	6	83.3	0.0	16.7	63.50	18.5	a*

CRP Lumira

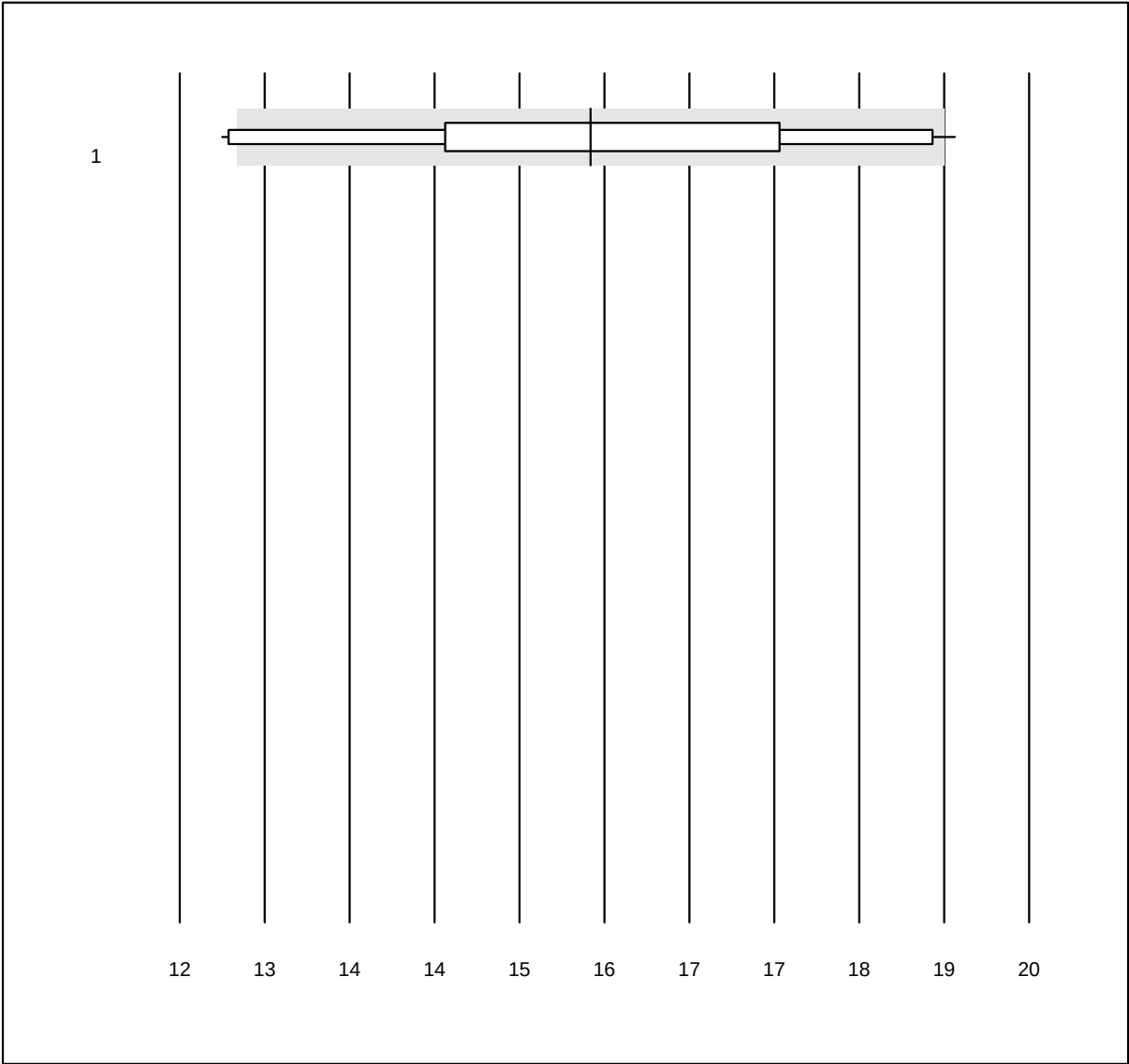


QUALAB Toleranz: 21%

CRP Lumira (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Lumira Dx	13	76.9	15.4	7.7	15.9	13.6	e*

Transaminasi GPT/ALT 1

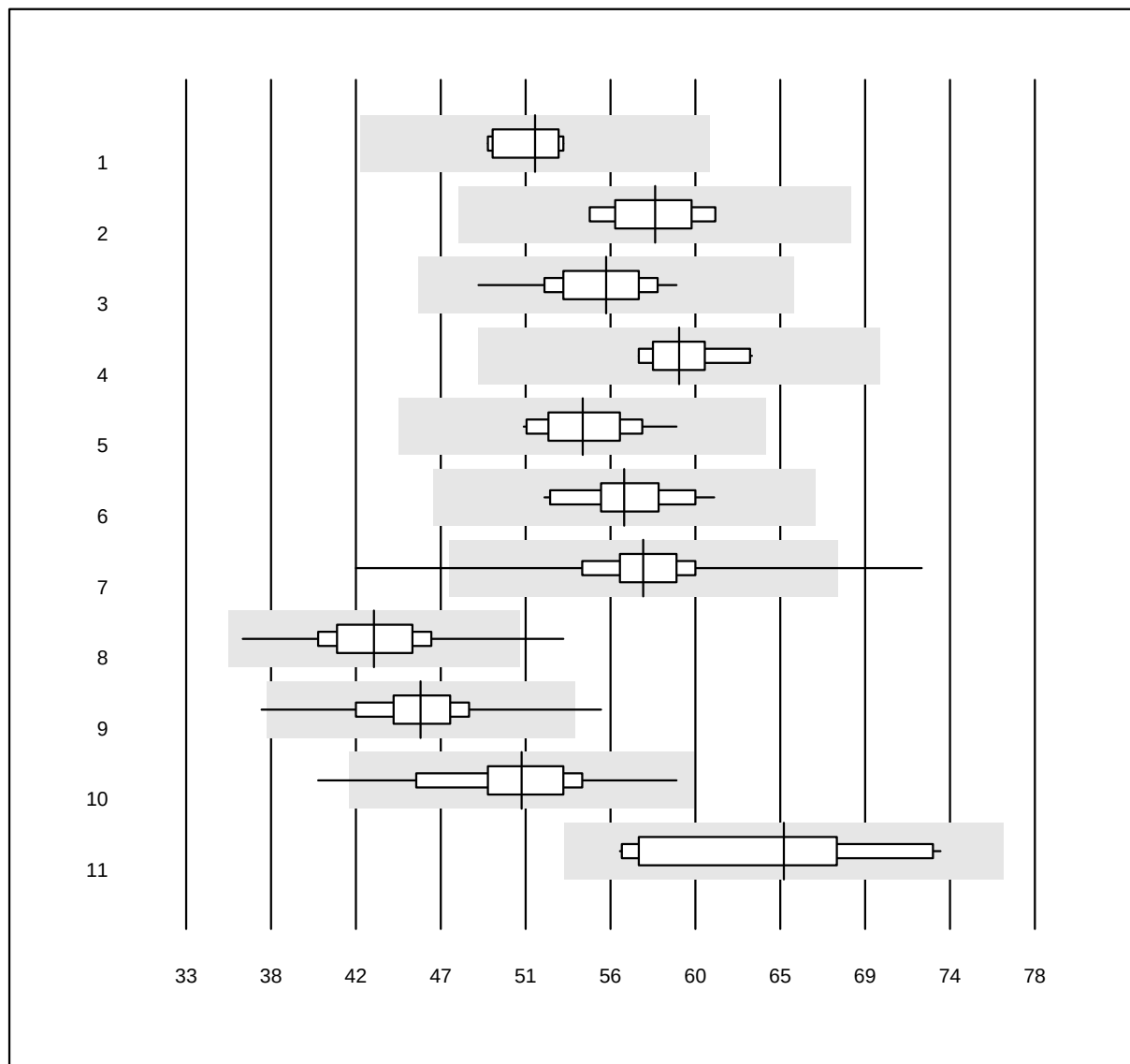


QUALAB Tolleranz: 18%

Transaminasi GPT/ALT
(U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	52	3.2	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	58	3.7	e
3 Roche	49	100.0	0.0	0.0	55	4.4	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	59	3.5	e
5 Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	54	4.3	e
6 Selectra Pro	14	100.0	0.0	0.0	56	4.3	e
7 Fuji Dri-Chem	1189	98.3	0.5	1.2	57	4.7	e
8 Spotchem D-Concept	661	98.9	0.3	0.8	43	5.8	e
9 Spotchem SP-4430	125	97.6	1.6	0.8	45	5.9	e
10 Piccolo	74	94.6	1.4	4.1	51	6.6	e
11 Seamaty	11	90.9	0.0	9.1	65	8.8	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Transaminasi GPT/ALT 2

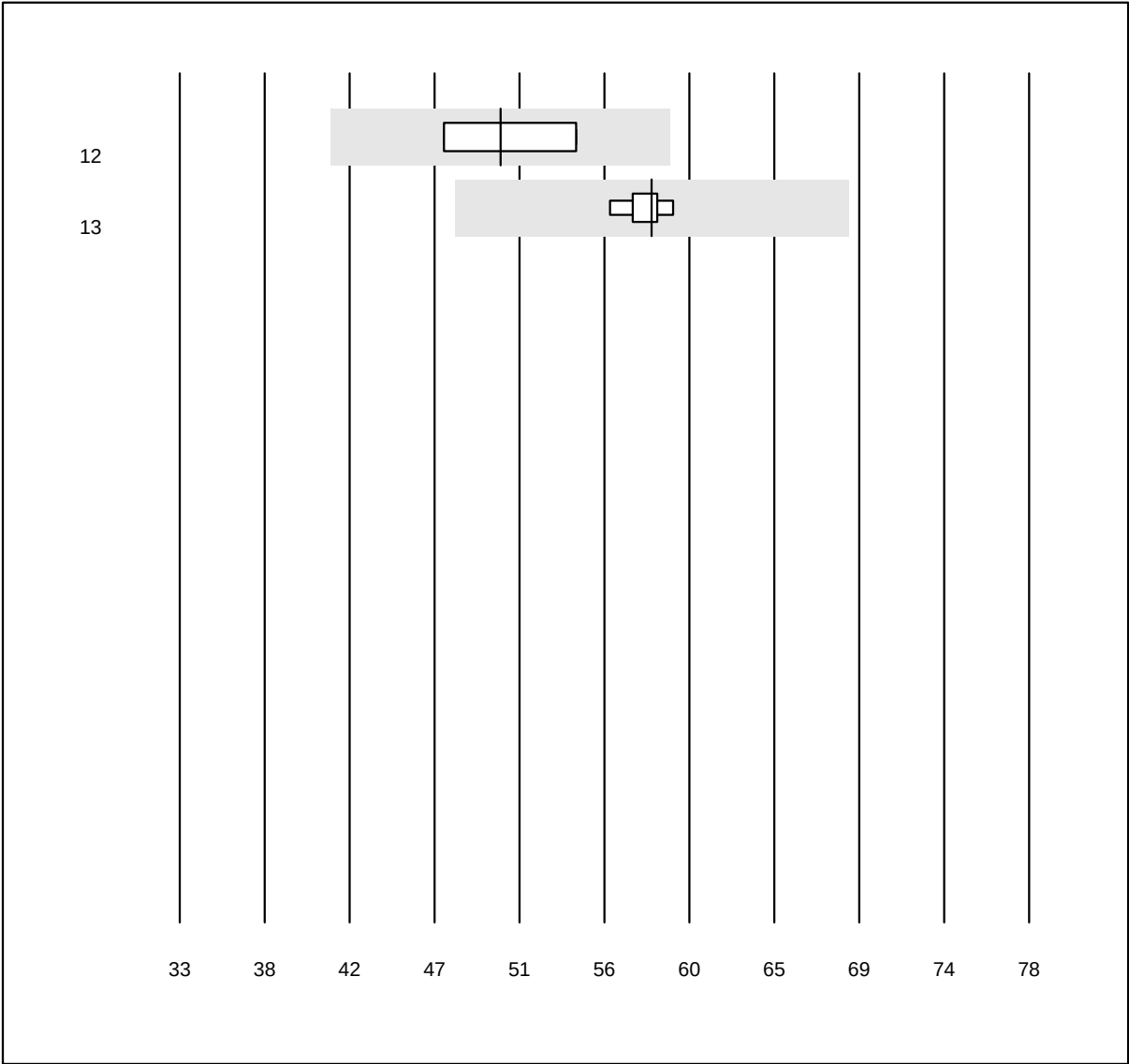


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminasi GPT/ALT
(U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	50	6.7	e*
13 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	58	1.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Albumina 1

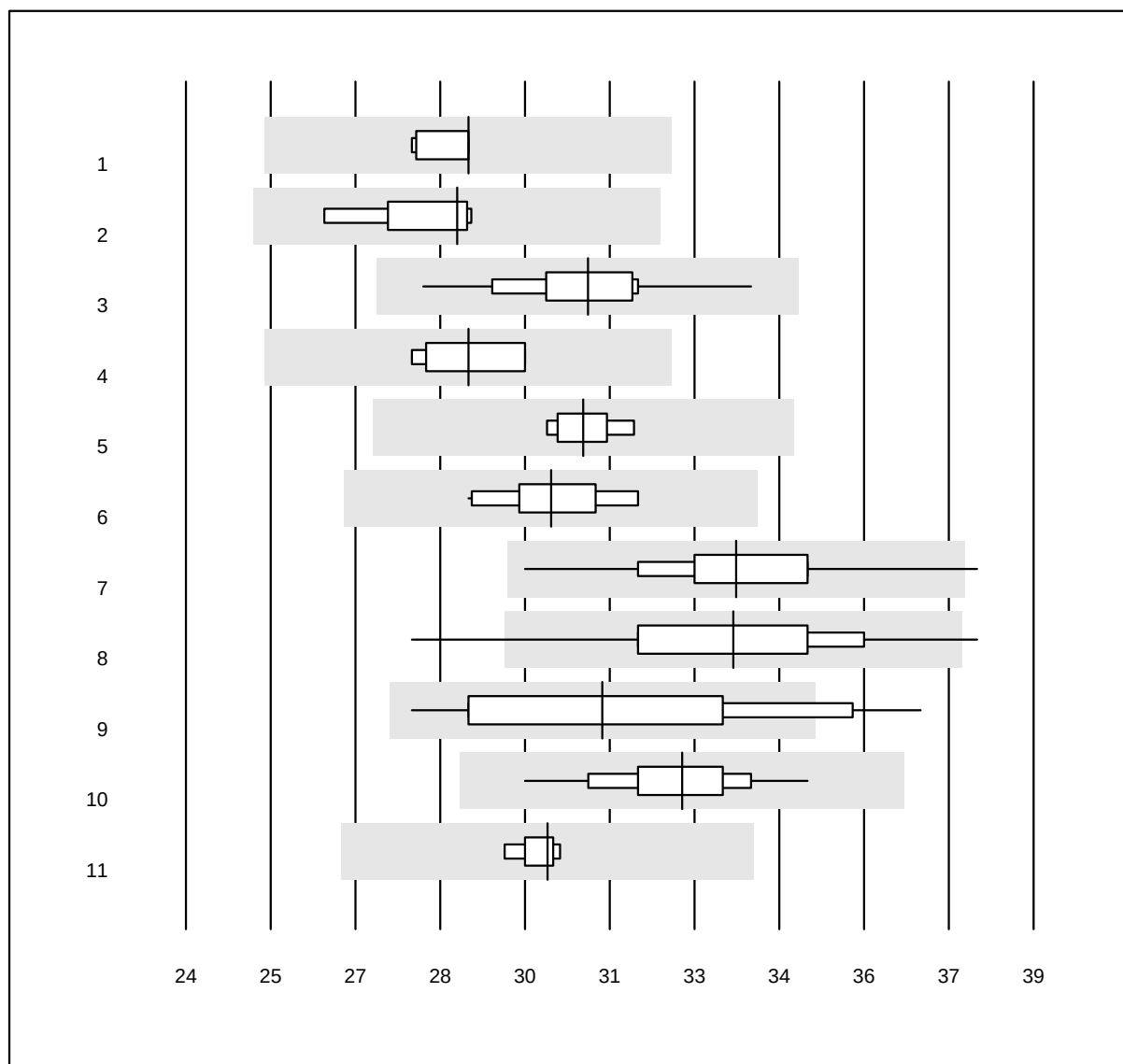


QUALAB Tolleranz: 12%
(< 30.0: +/- 3.6 g/l)

Albumina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	29.0	1.7	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	28.8	3.0	e
3 Roche	42	100.0	0.0	0.0	31.1	3.6	e
4 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	29.0	2.9	e
5 Autolyser	8	100.0	0.0	0.0	31.0	1.6	e
6 Selectra Pro	10	100.0	0.0	0.0	30.5	3.2	e
7 Fuji Dri-Chem	243	99.6	0.4	0.0	33.7	4.0	e
8 Spotchem D-Concept	242	97.5	2.1	0.4	33.7	5.2	e
9 Spotchem SP-4430	21	90.5	9.5	0.0	31.4	8.1	e*
10 Piccolo	66	98.5	0.0	1.5	32.8	3.4	e
11 Seamaty	7	100.0	0.0	0.0	30.4	1.1	e

Albumina 2

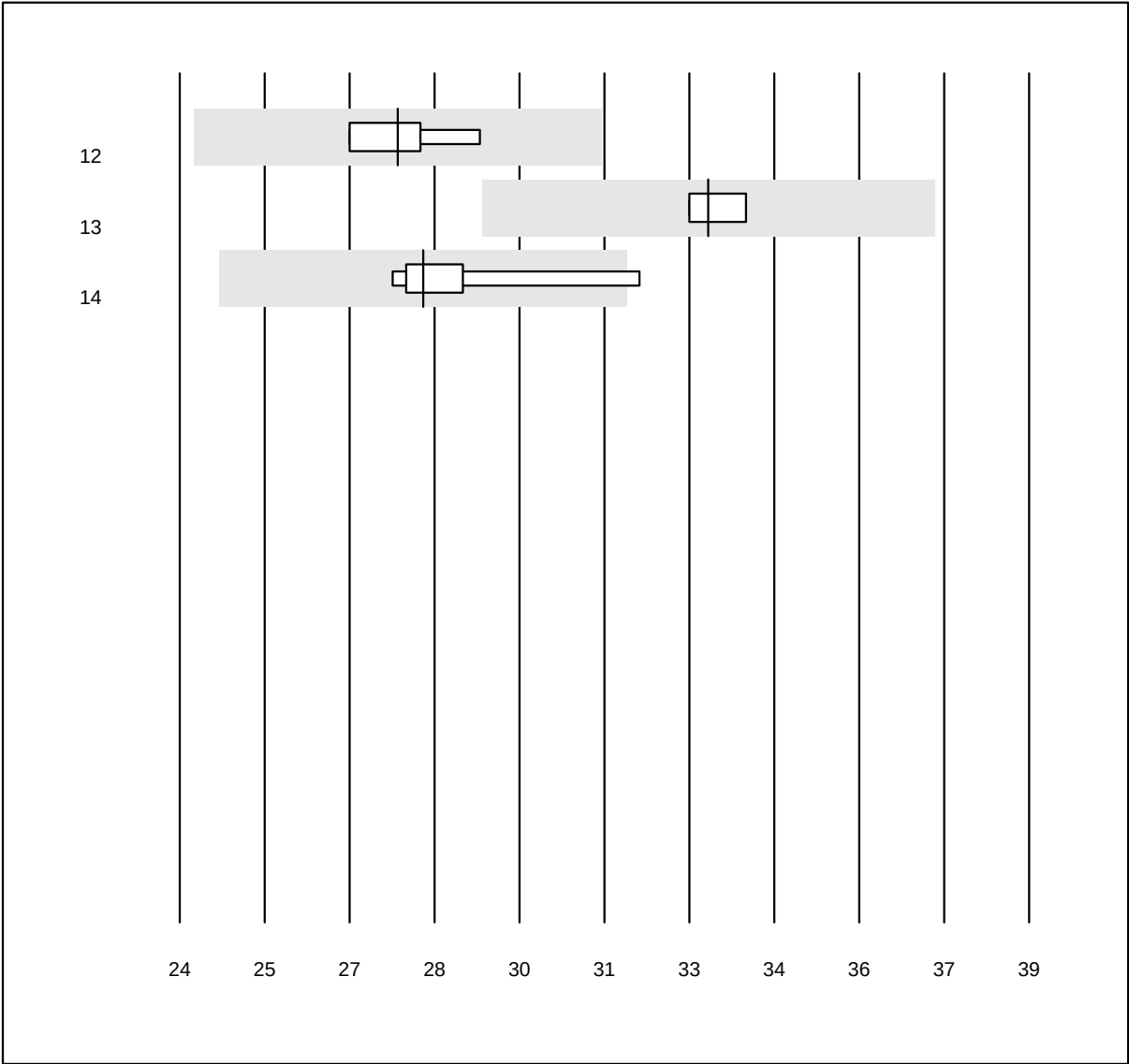


QUALAB Toleranz: 12%
(< 30.0: +/- 3.6 g/l)

Albumina (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	6	100.0	0.0	0.0	27.9	2.7	e
13 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	33.3	1.6	e
14 Turbidimetria	7	100.0	0.0	0.0	28.3	4.6	e*

Fosfatasi alcalina 1

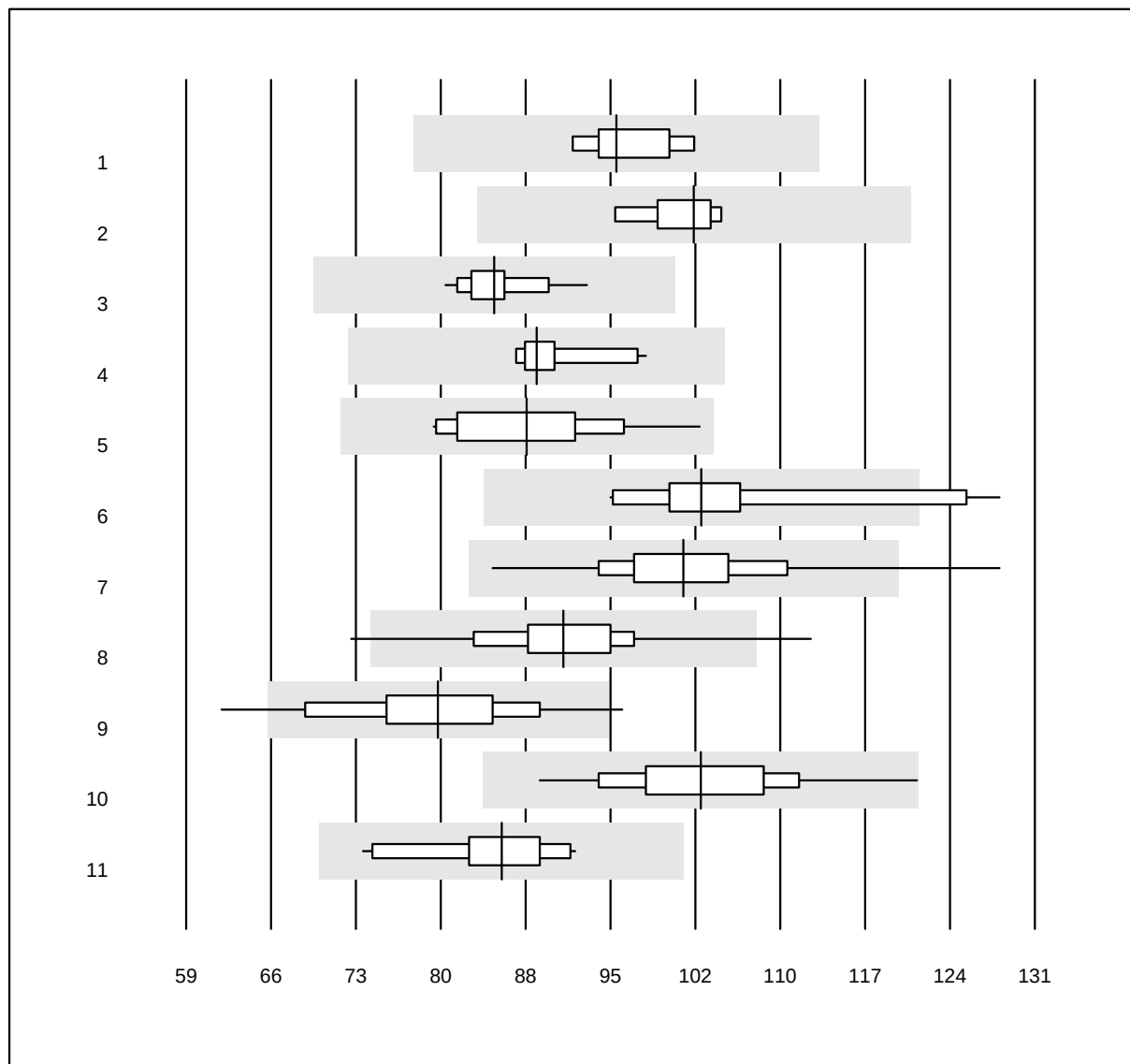


QUALAB Tolleranz: 18%

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	96	3.6	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	102	2.7	e
3 Roche	47	100.0	0.0	0.0	85	3.4	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	89	3.7	e
5 Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	88	6.8	e
6 Selectra Pro	12	83.3	8.3	8.3	103	8.8	e*
7 Fuji Dri-Chem	1057	99.1	0.9	0.1	101	6.2	e
8 Spotchem D-Concept	591	97.6	1.0	1.4	91	6.1	e
9 Spotchem SP-4430	72	90.3	6.9	2.8	80	9.2	e
10 Piccolo	51	98.0	0.0	2.0	103	6.8	e
11 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	86	6.5	e

Fosfatasi alcalina 2

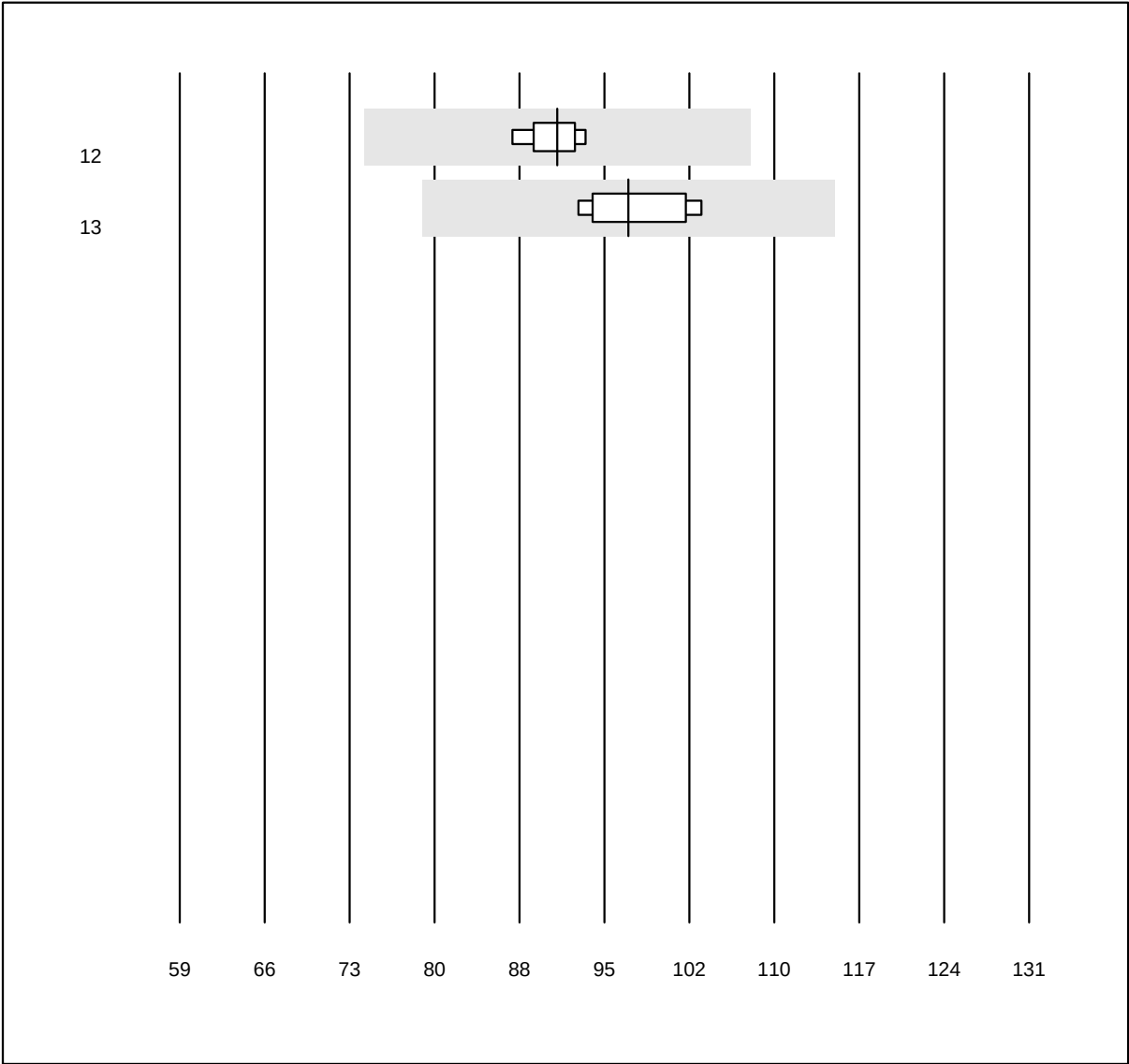


QUALAB Toleranz: 18%

Fosfatasi alcalina (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	5	100.0	0.0	0.0	91	2.1	e
13 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	97	4.3	e

Amilasi

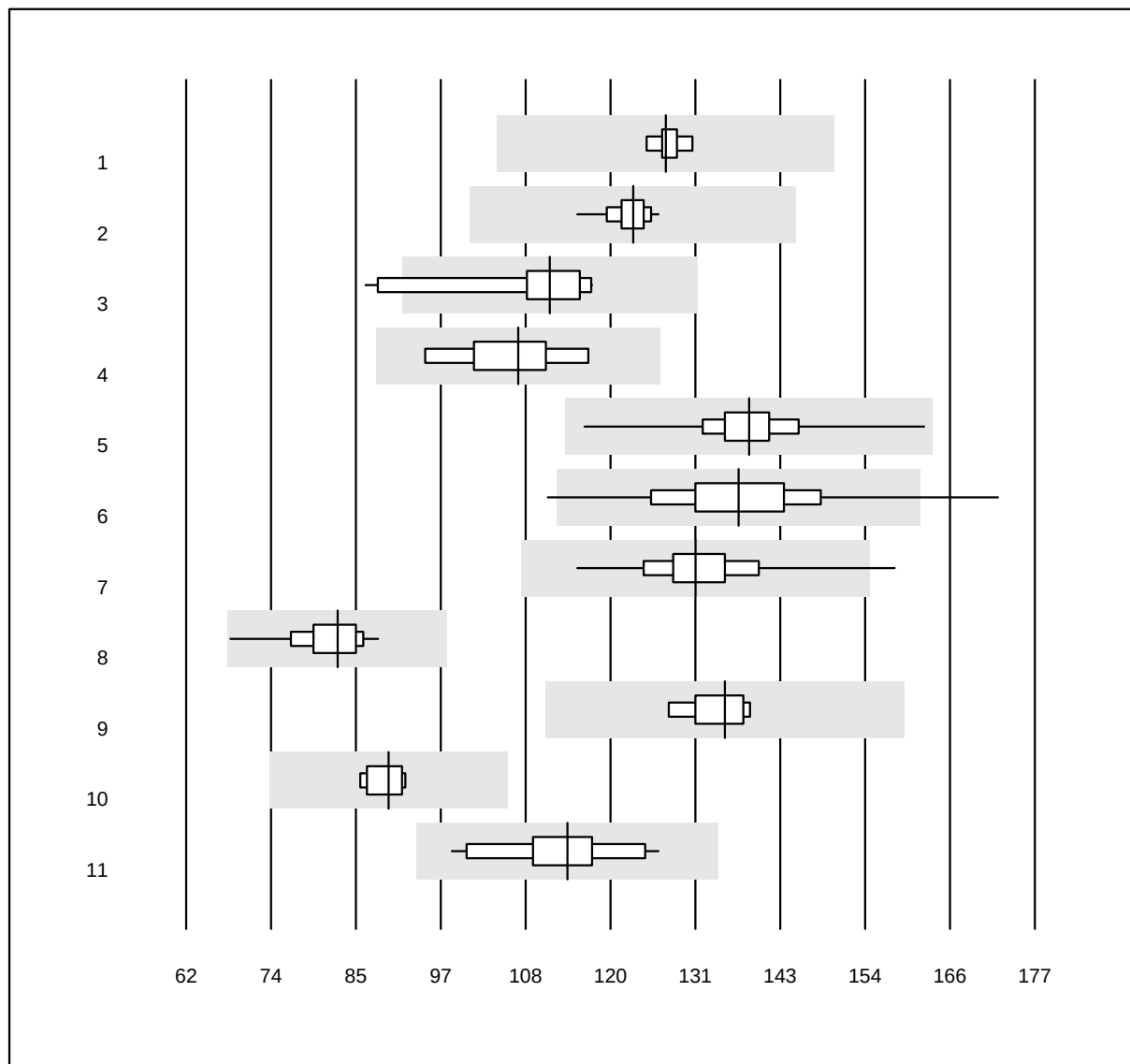


QUALAB Tolleranz: 18%

Amilasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
2 Roche	19	100.0	0.0	0.0	123	2.1	e
3 Autolyser	10	90.0	10.0	0.0	111	8.3	e*
4 Selectra Pro	8	100.0	0.0	0.0	107	6.3	e*
5 Fuji Dri-Chem	736	99.9	0.0	0.1	138	3.9	e
6 Spotchem D-Concept	404	98.5	1.2	0.2	137	6.7	e
7 Spotchem SP-4430	48	95.8	2.1	2.1	131	5.4	e
8 Piccolo	63	95.2	0.0	4.8	83	5.1	e
9 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	135	2.7	e
10 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	89	2.8	e
11 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	114	6.2	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Transaminasi GOT/AST 1

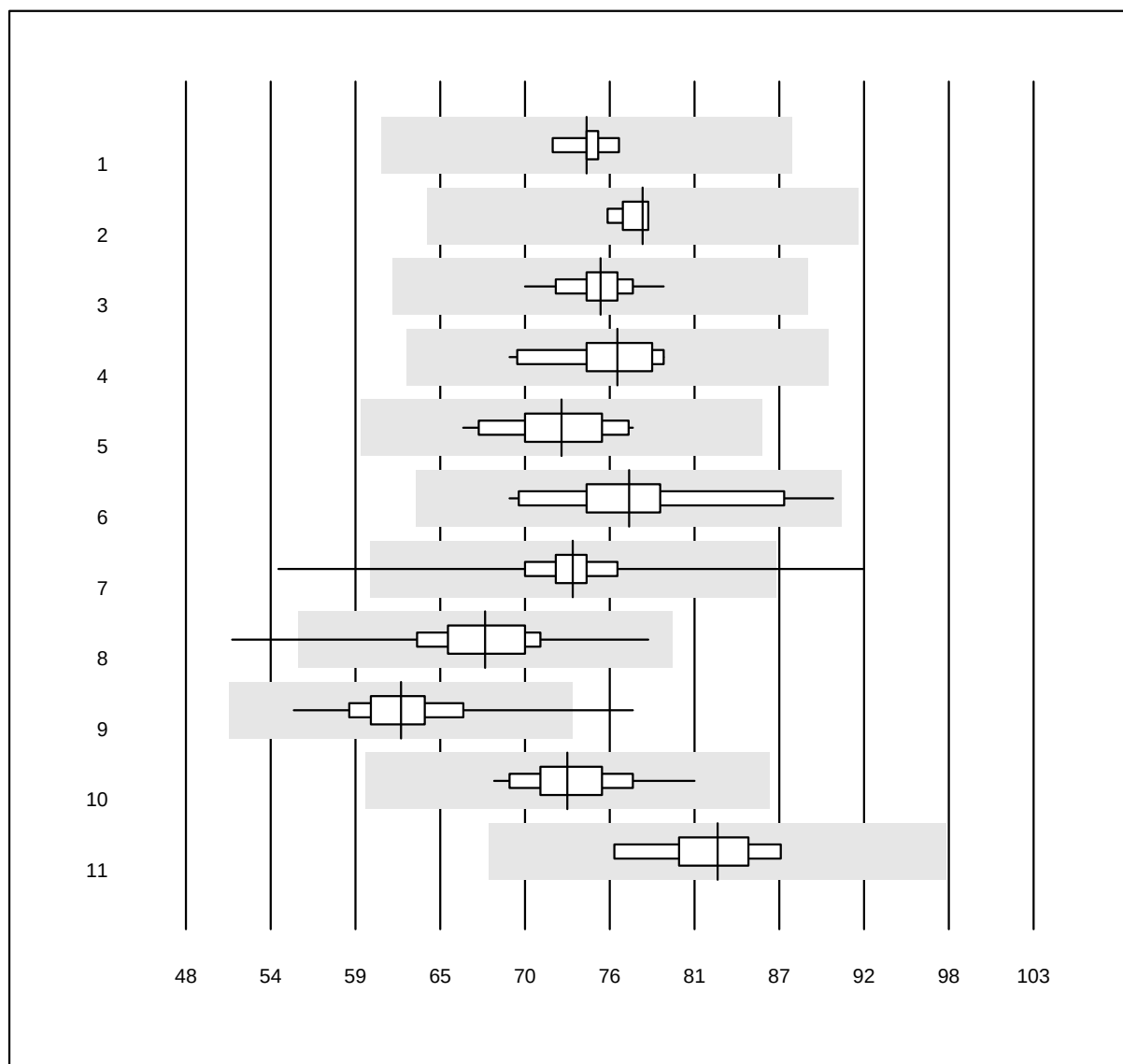


QUALAB Tolleranz: 18%

Transaminasi GOT/AST
(U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	74	1.5	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	78	1.3	e
3 Roche	49	100.0	0.0	0.0	75	2.6	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	76	4.0	e
5 Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	72	4.4	e
6 Selectra Pro	14	85.7	0.0	14.3	77	6.7	e
7 Fuji Dri-Chem	1168	99.1	0.4	0.4	73	3.7	e
8 Spotchem D-Concept	653	99.4	0.5	0.2	67	4.9	e
9 Spotchem SP-4430	125	99.2	0.8	0.0	62	5.3	e
10 Piccolo	74	98.6	0.0	1.4	73	4.1	e
11 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	83	3.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Transaminasi GOT/AST 2

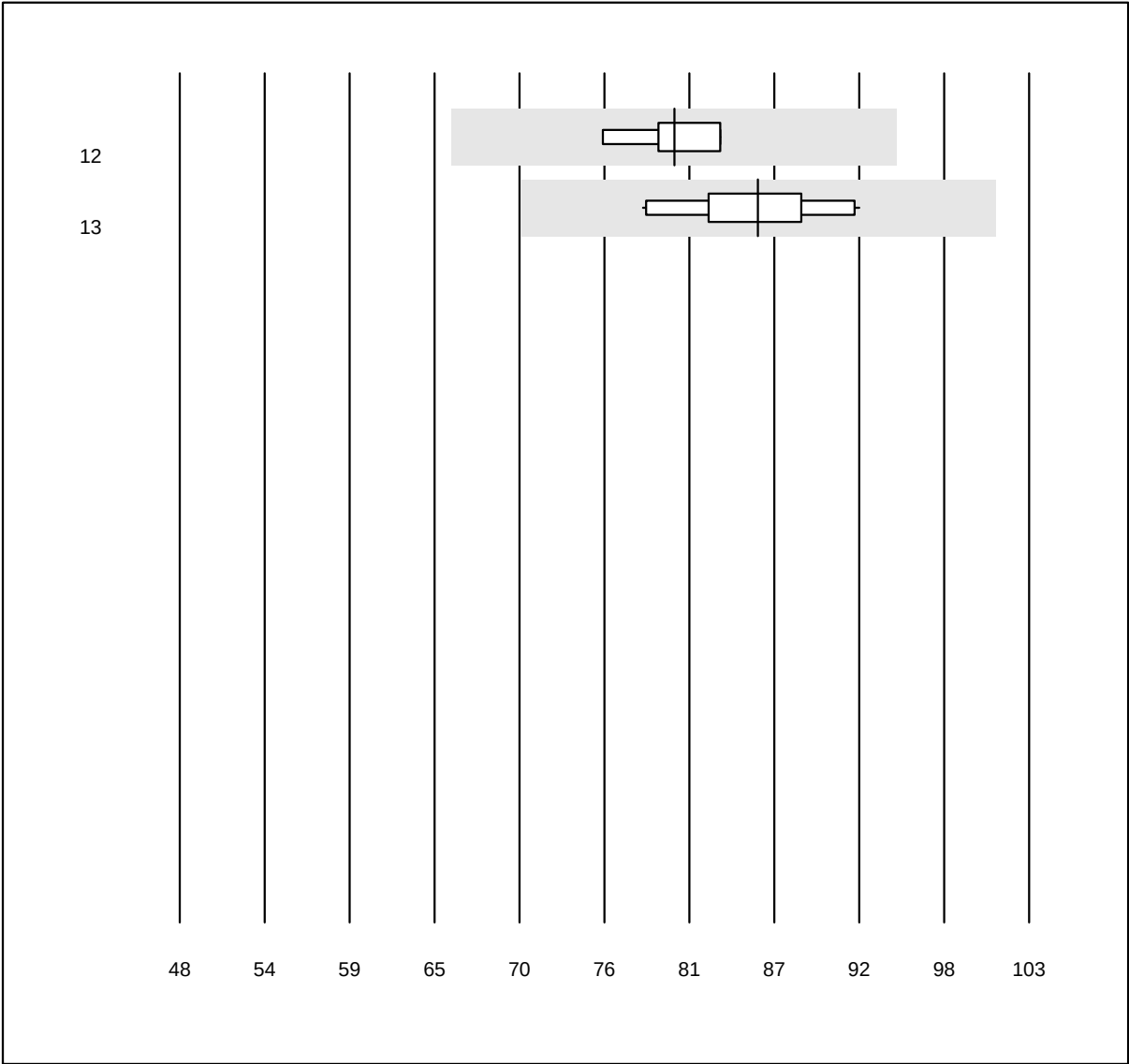


QUALAB Toleranz: 18%

Transaminasi GOT/AST
(U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	80	3.1	e
13 Seamaty	10	100.0	0.0	0.0	85	4.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Bilirubina diretta

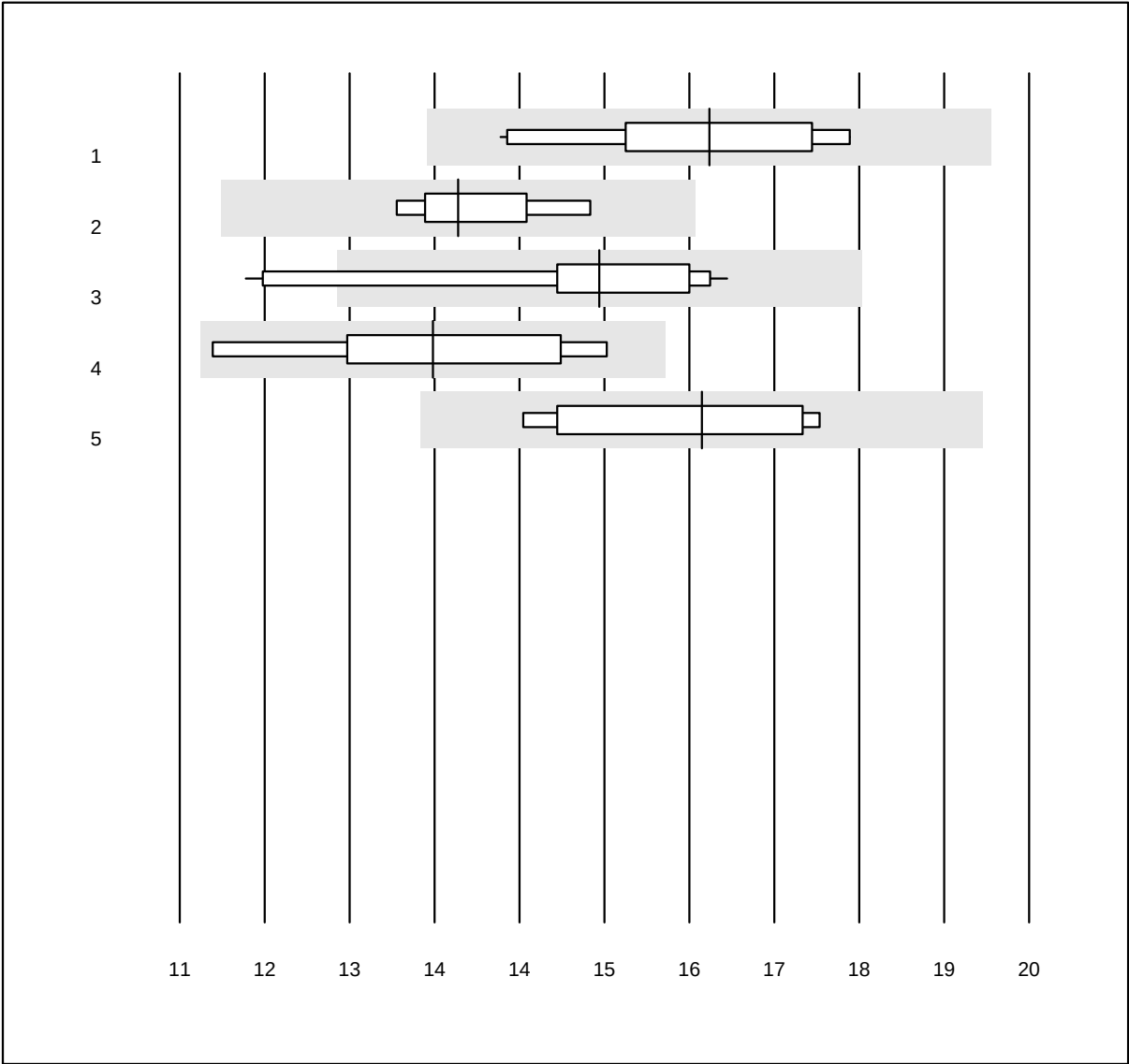


MQ Tolleranz: 18%

Bilirubina diretta (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	16	100.0	0.0	0.0	16.6	7.5	e
2 Siemens	4	100.0	0.0	0.0	13.9	4.2	e
3 Fuji Dri-Chem	15	80.0	20.0	0.0	15.4	11.3	e*
4 Vitros	5	80.0	0.0	20.0	13.7	8.9	e*
5 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	16.5	8.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Bilirubina totale 1

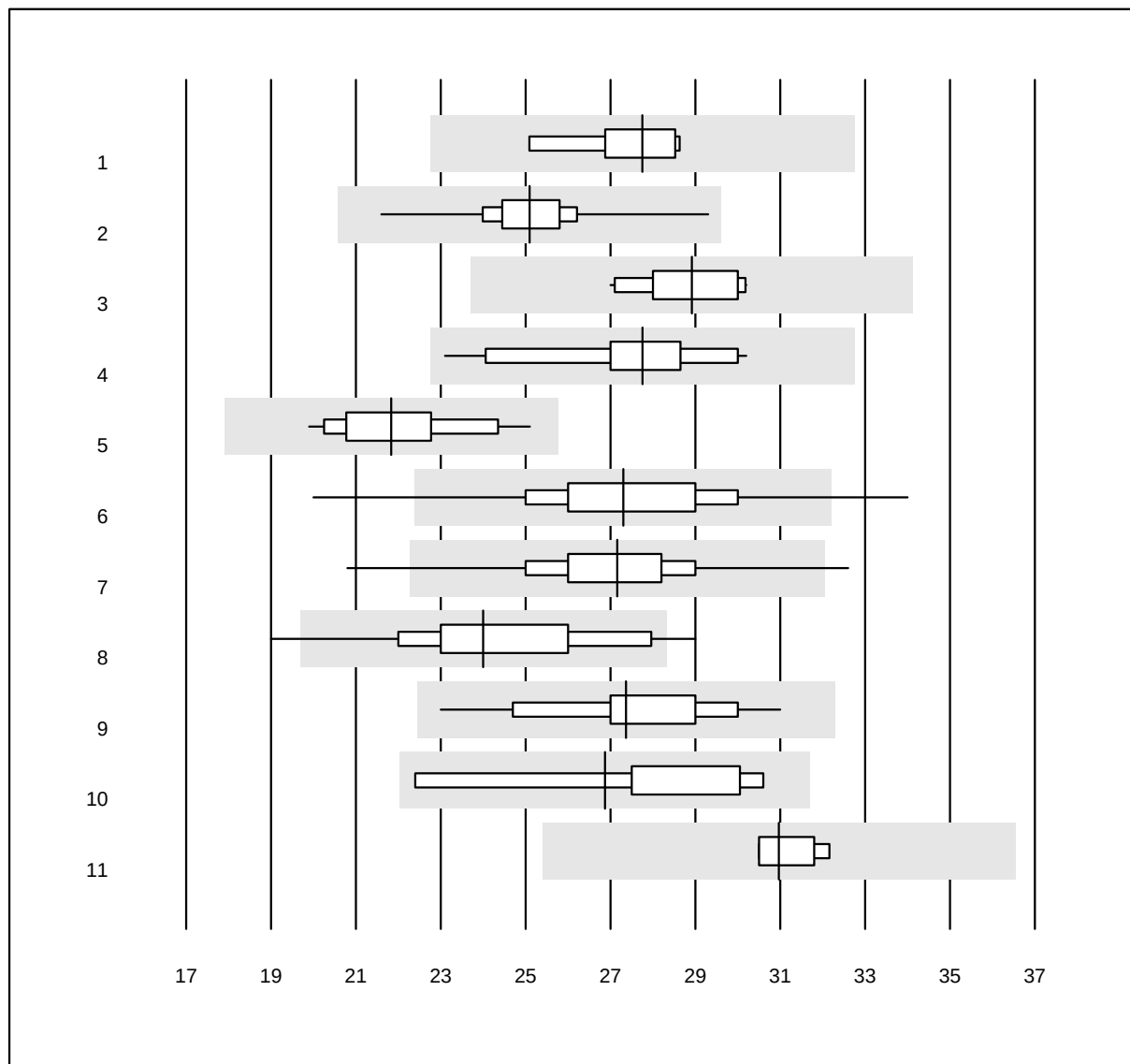


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubina totale ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	27.8	4.0	e
2 Roche	48	100.0	0.0	0.0	25.1	5.0	e
3 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	28.9	3.7	e
4 Autolyser	21	100.0	0.0	0.0	27.8	7.2	e
5 Selectra Pro	14	100.0	0.0	0.0	21.8	6.4	e
6 Fuji Dri-Chem	878	96.1	2.3	1.6	27.3	7.7	e
7 Spotchem D-Concept	471	97.0	1.9	1.1	27.2	6.5	e
8 Spotchem SP-4430	64	92.2	6.2	1.6	24.0	9.8	e
9 Piccolo	61	91.8	0.0	8.2	27.4	7.5	e
10 Seamaty	11	81.8	0.0	18.2	26.9	8.9	e*
11 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	31.0	2.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Bilirubina totale 2

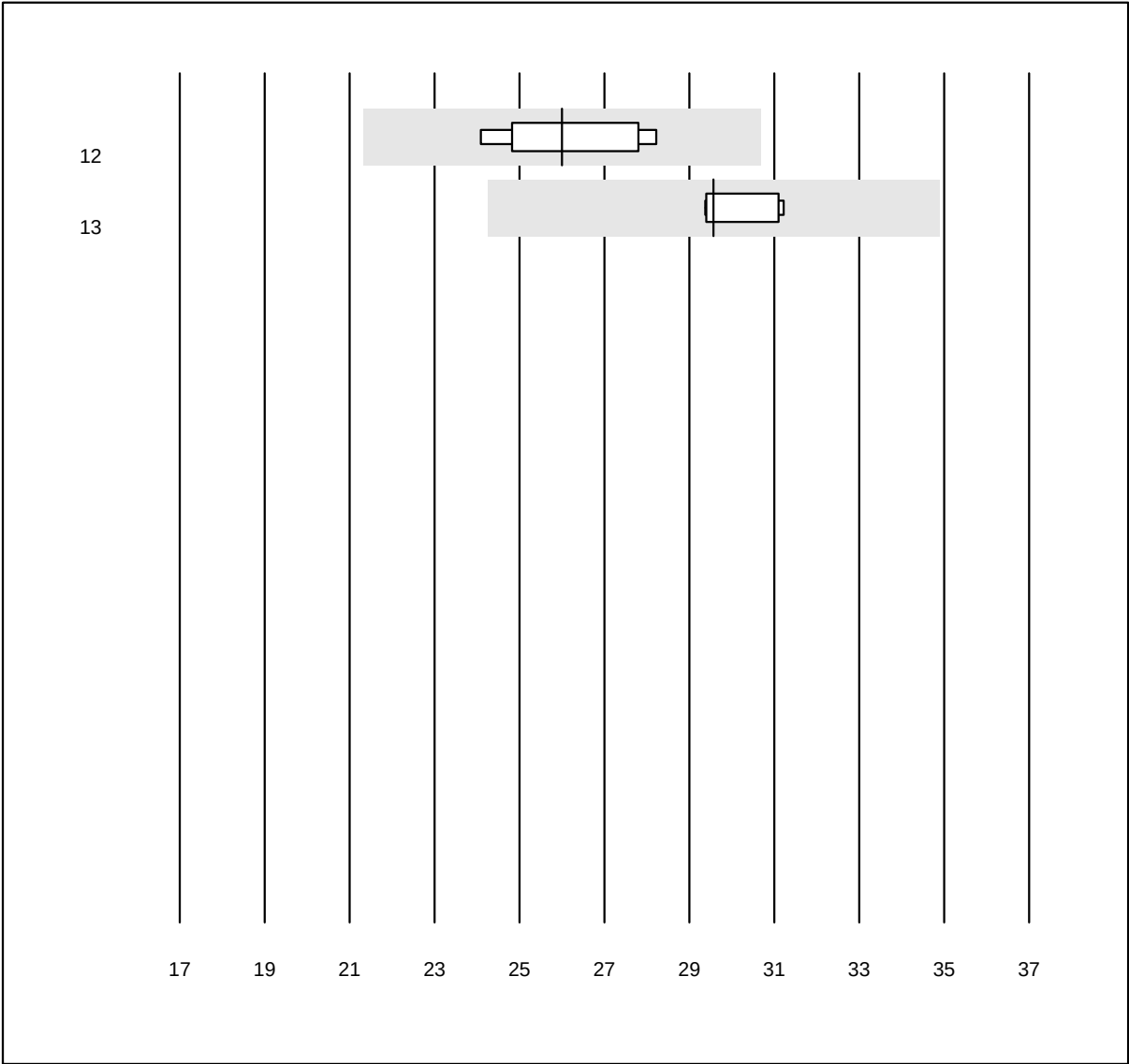


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubina totale (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	26.0	6.2	e*
13 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	29.6	2.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Calcio

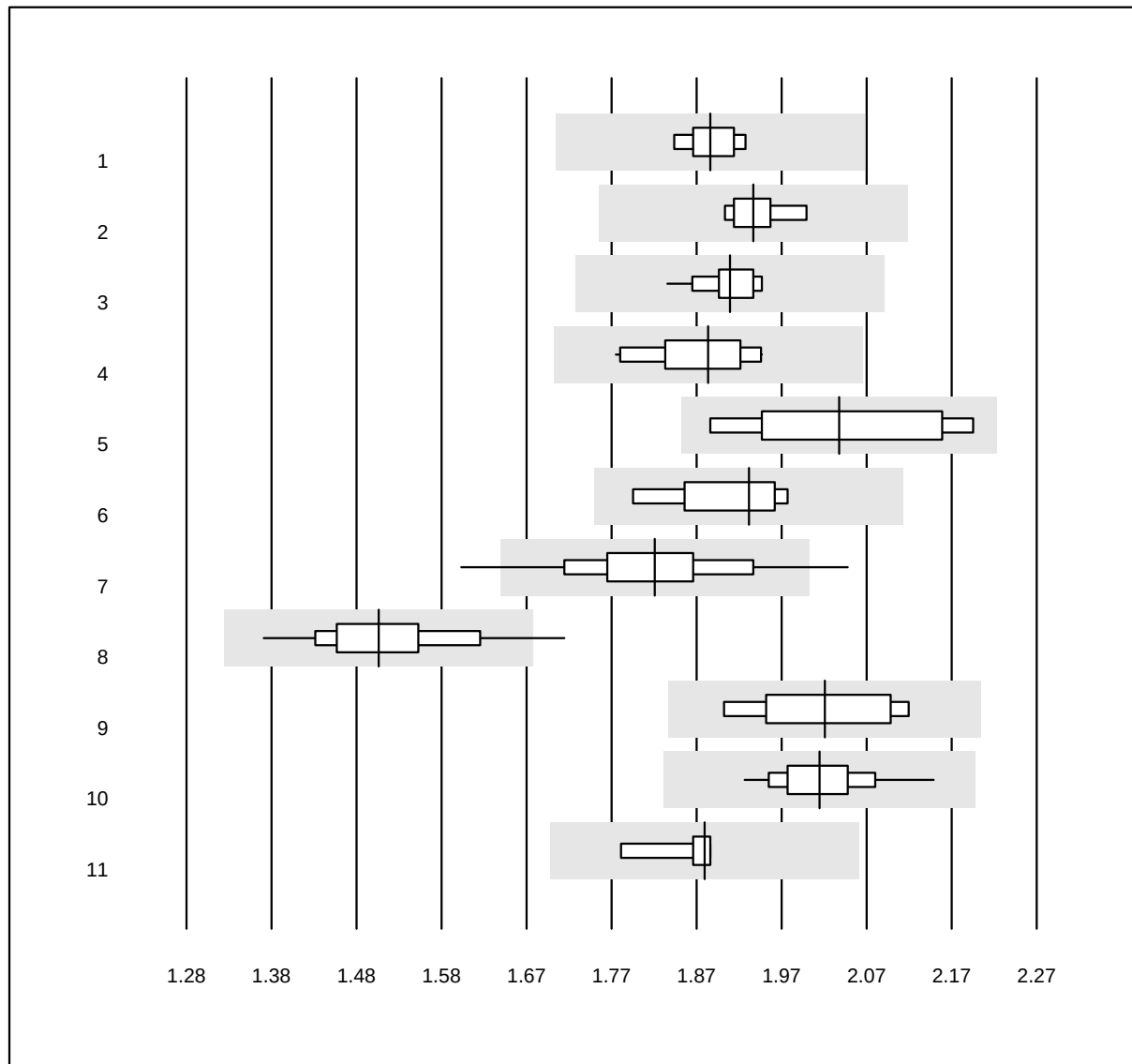


QUALAB Tolleranz: 9%
(< 2.0: +/- 0.18 mmol/l)

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.89	1.5	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	1.94	1.4	e
3 Roche	48	100.0	0.0	0.0	1.91	1.5	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	1.89	2.9	e
5 Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	2.04	5.3	e*
6 Selectra Pro	4	100.0	0.0	0.0	1.94	3.0	e*
7 Fuji Dri-Chem	218	97.2	2.3	0.5	1.83	4.3	e
8 Spotchem D-Concept	58	96.6	1.7	1.7	1.50	4.9	e
9 Spotchem SP-4430	9	88.9	0.0	11.1	2.02	3.8	e*
10 Piccolo	49	95.9	0.0	4.1	2.02	2.3	e
11 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	1.88	1.7	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Calcio ISE

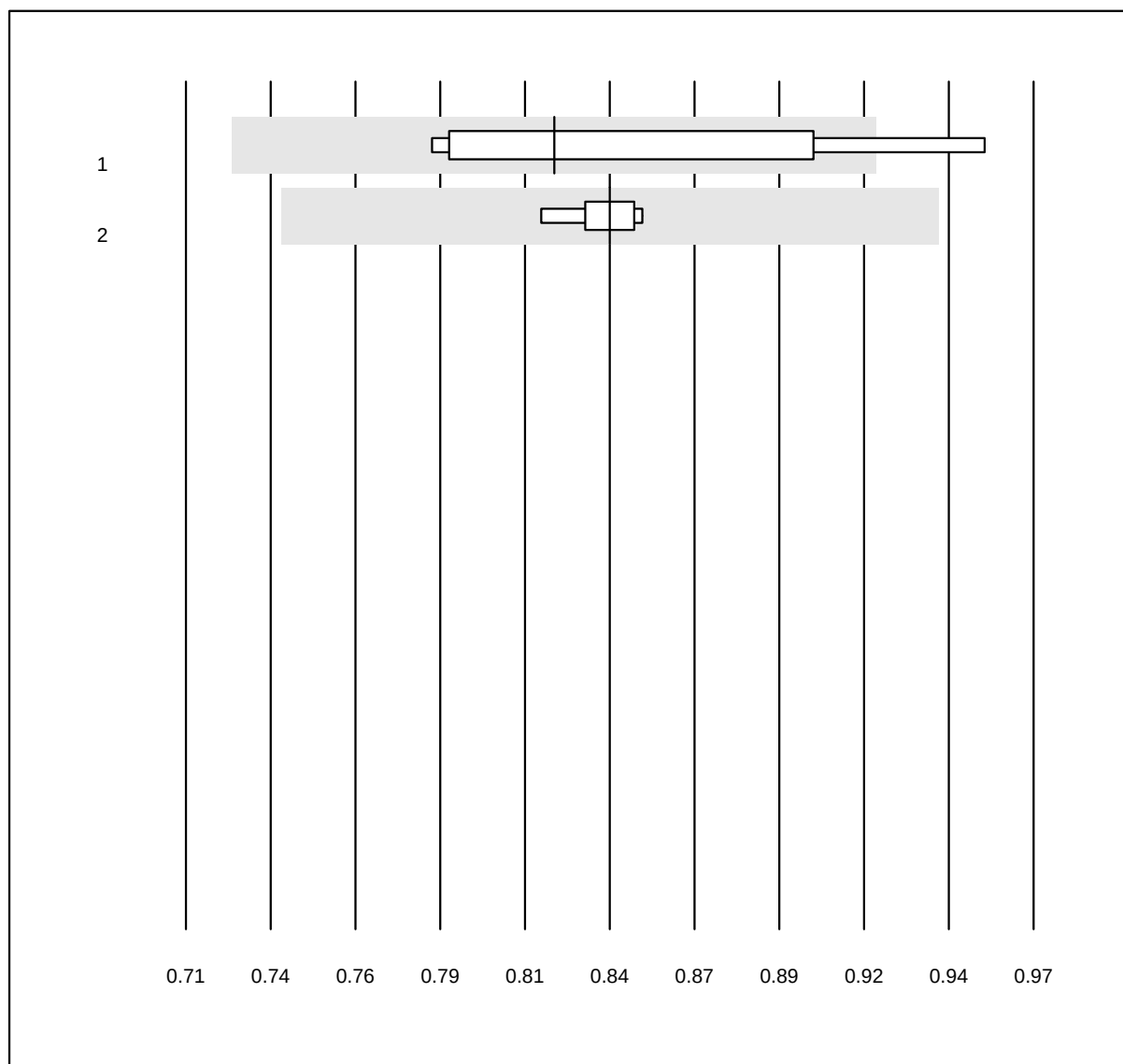


MQ Toleranz: 12%

Calcio ISE (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ISE diretto	4	100.0	0.0	0.0	0.82	7.2	e*
2 iStat Chem8	8	100.0	0.0	0.0	0.84	1.2	e

Cloruri

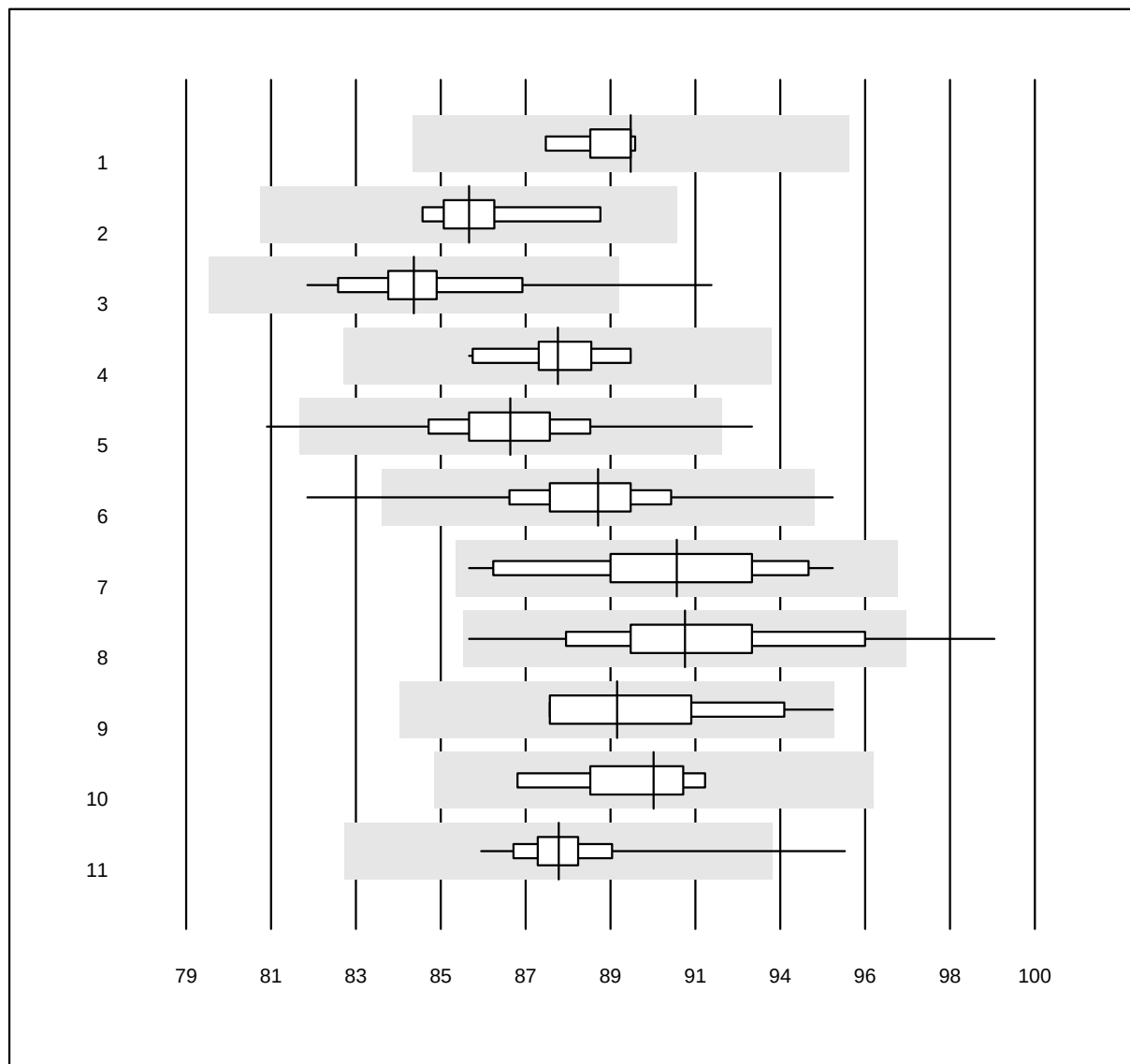


QUALAB Toleranz: 6%

Cloruri (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	90	0.9	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	86	1.4	e
3 Roche	35	94.3	5.7	0.0	85	2.5	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	88	1.4	e
5 Fuji Dri-Chem	964	98.4	0.6	0.9	87	1.8	e
6 Spotchem D-Concept	402	96.3	1.5	2.2	89	2.0	e
7 Piccolo	25	100.0	0.0	0.0	91	2.8	e
8 Spotchem EL-SE 1520	43	90.7	9.3	0.0	91	3.0	e
9 iStat Chem8	13	100.0	0.0	0.0	90	2.4	e
10 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	91	1.5	e
11 Exias	96	96.9	2.1	1.0	88	1.5	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Colesterolo 1

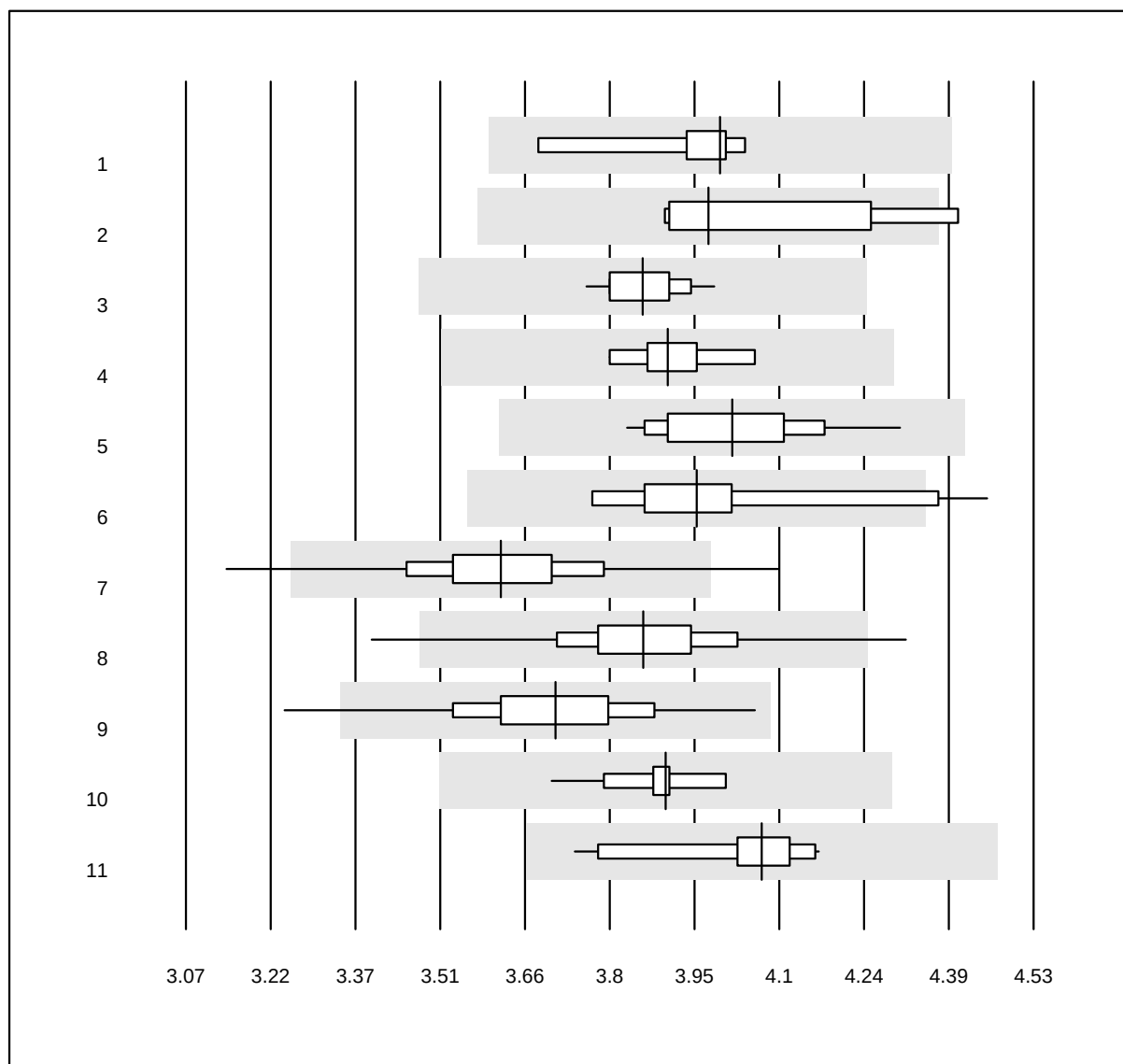


QUALAB Tolleranz: 10%

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	3.99	2.7	e
2 Beckman	5	80.0	0.0	20.0	3.97	4.7	e*
3 Roche	38	100.0	0.0	0.0	3.86	1.5	e
4 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	3.90	2.0	e
5 Autolyser	22	100.0	0.0	0.0	4.01	3.0	e
6 Selectra Pro	12	83.3	8.3	8.3	3.95	4.7	e*
7 Fuji Dri-Chem	1005	97.1	0.9	2.0	3.61	3.7	e
8 Spotchem D-Concept	506	97.6	0.8	1.6	3.86	3.3	e
9 Spotchem SP-4430	72	98.6	1.4	0.0	3.71	3.8	e
10 Piccolo	20	90.0	0.0	10.0	3.90	2.0	e
11 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	4.06	2.9	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Colesterolo 2

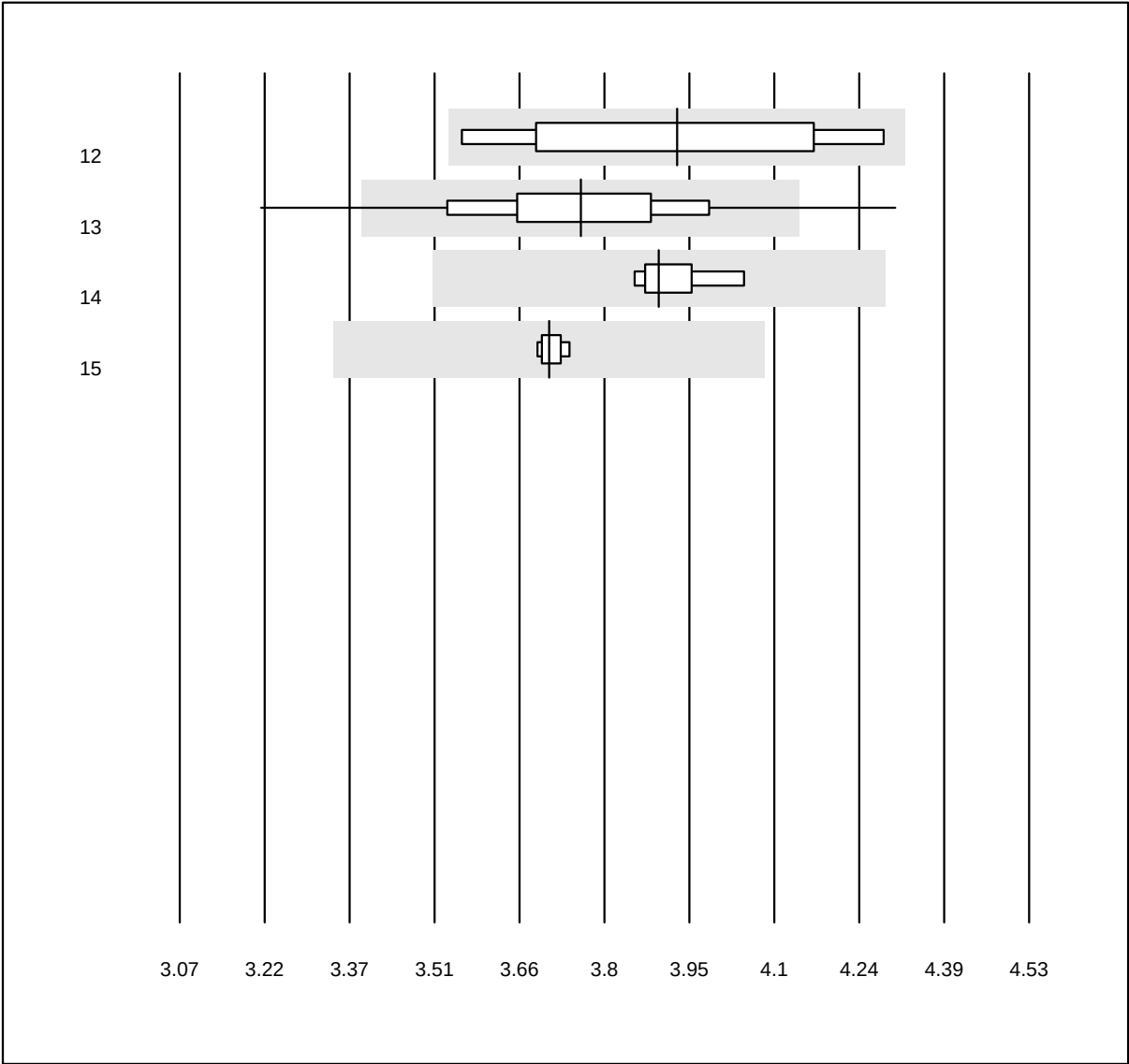


QUALAB Toleranz: 10%

Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	4	100.0	0.0	0.0	3.92	6.3	e*
13 Cholestech LDX	198	94.4	4.0	1.5	3.76	4.8	e
14 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	3.89	1.4	e
15 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	3.71	0.5	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HDL-Colesterolo 1

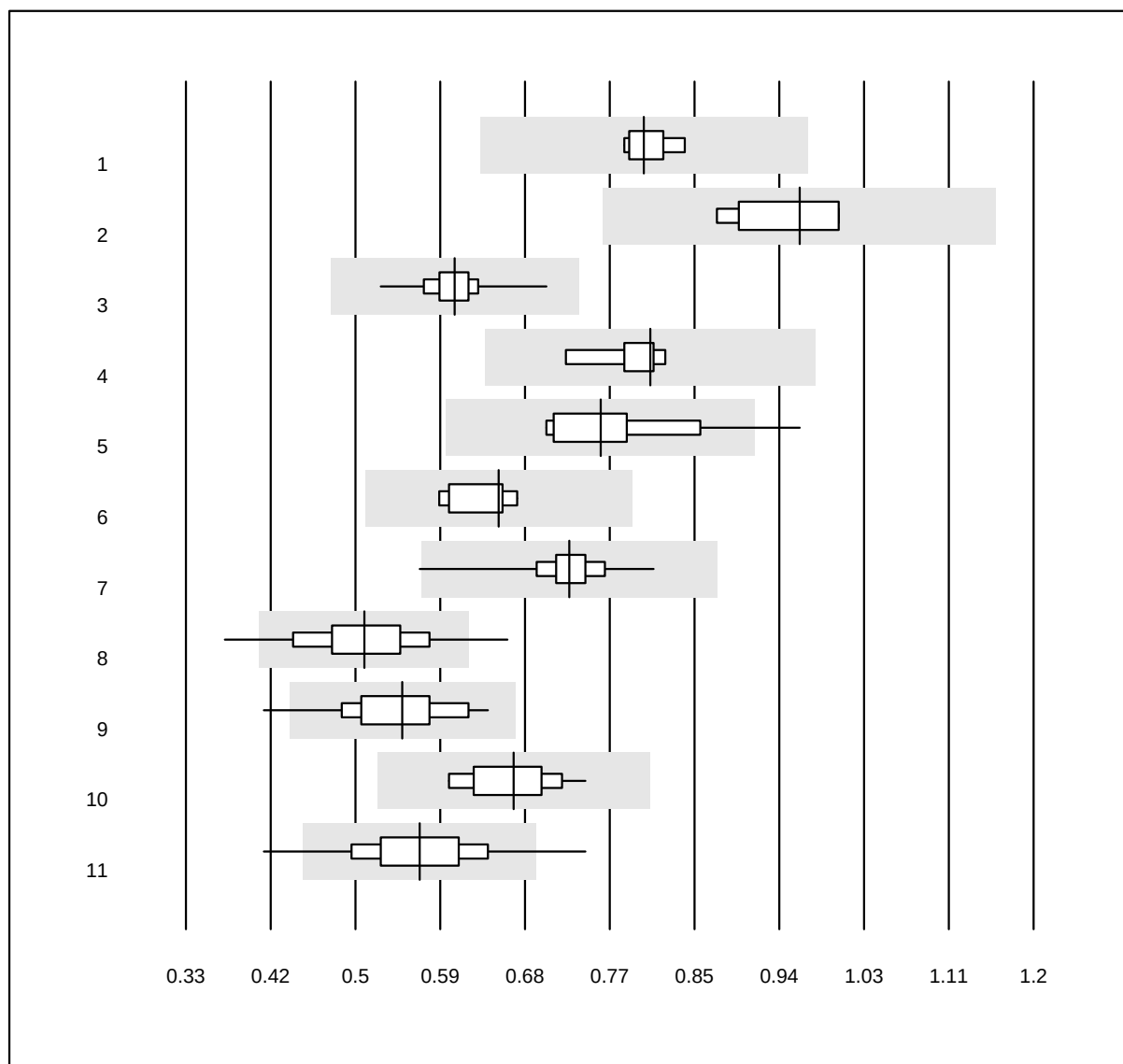


QUALAB Tolleranz: 21%

HDL-Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0.80	2.6	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	0.96	5.9	e*
3 Roche	37	97.3	0.0	2.7	0.61	4.5	e
4 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	0.81	3.9	e
5 Autolyser	23	91.3	4.3	4.3	0.76	8.5	e
6 Selectra Pro	11	81.8	0.0	18.2	0.65	4.6	e
7 Fuji Dri-Chem	980	99.5	0.1	0.4	0.72	4.0	e
8 Spotchem D-Concept	495	94.7	3.2	2.0	0.51	10.2	e
9 Spotchem SP-4430	66	95.5	1.5	3.0	0.55	8.6	e
10 Piccolo	18	94.4	0.0	5.6	0.67	6.1	e
11 Cholestech LDX	199	91.0	7.5	1.5	0.57	10.6	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HDL-Colesterolo 2

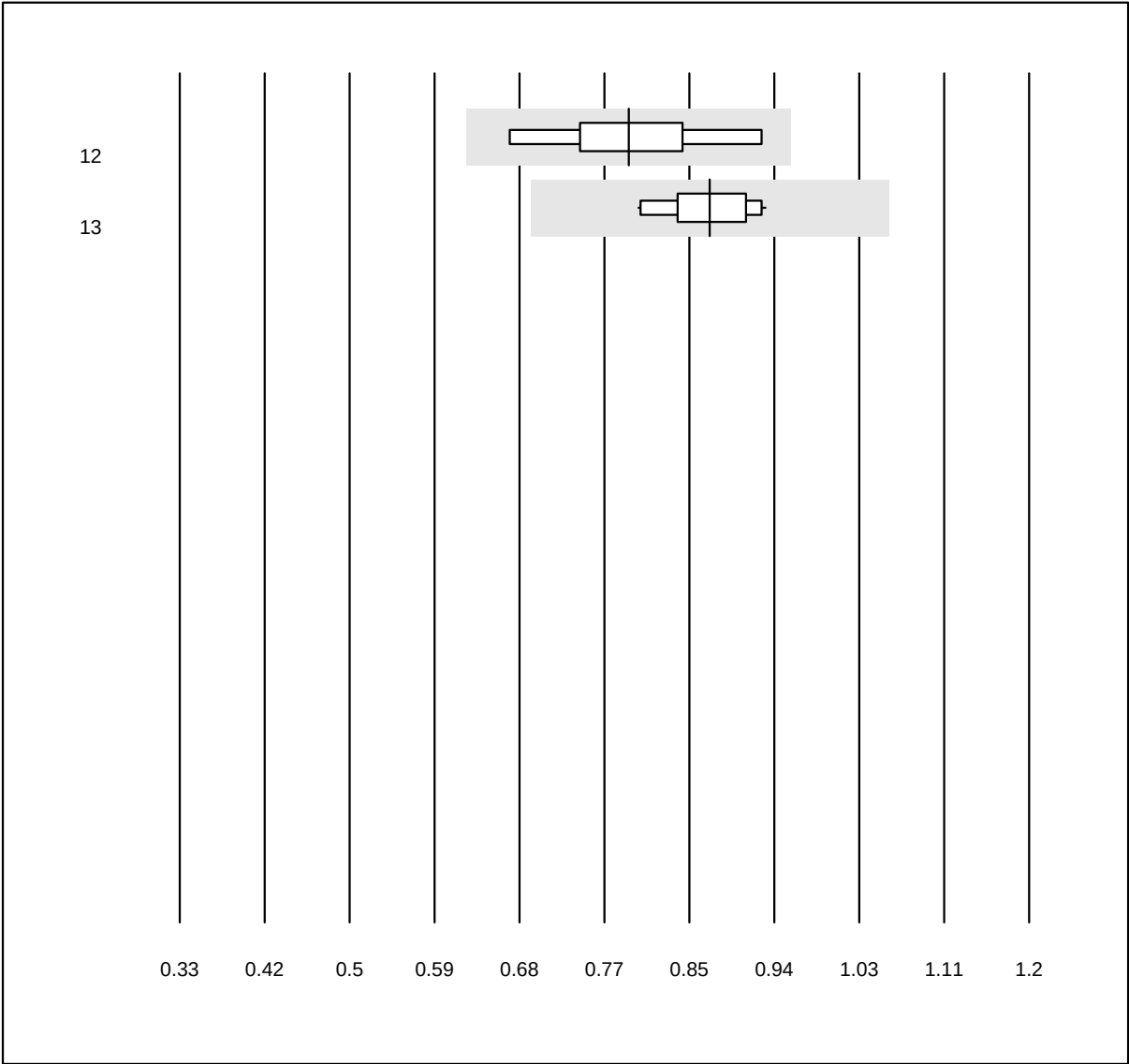


QUALAB Toleranz: 21%

HDL-Colesterolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	0.79	8.5	e*
13 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	0.87	4.9	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

eGFR CKD-EPI

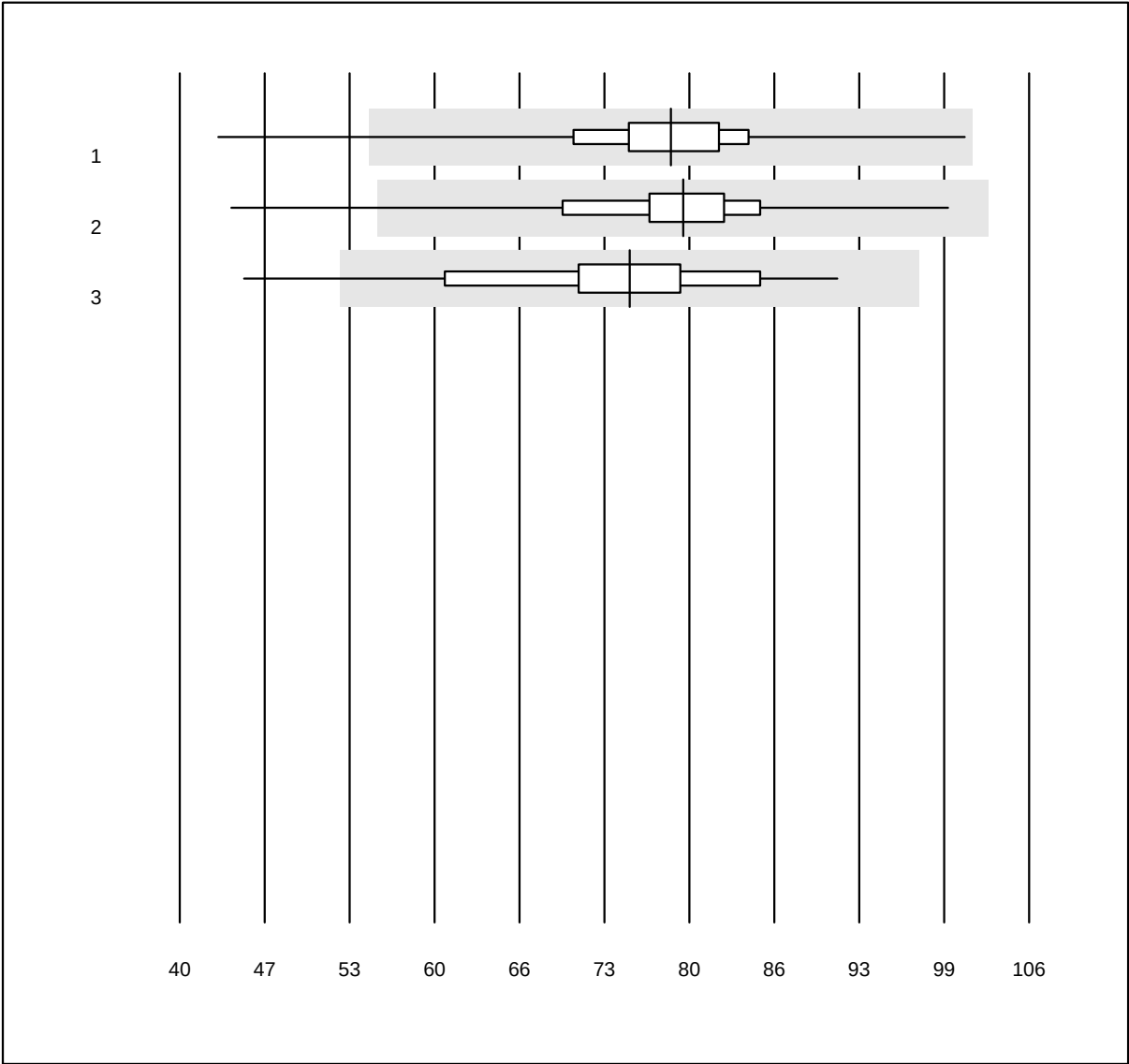


QUALAB Toleranz: 30%

eGFR CKD-EPI ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	425	95.8	2.8	1.4	78.2	10.0	e
2 Spotchem	286	95.8	1.7	2.4	79.1	9.4	e
3 Chimica umida	59	96.6	3.4	0.0	75.0	12.0	e

eGFR Cockcroft-Gault

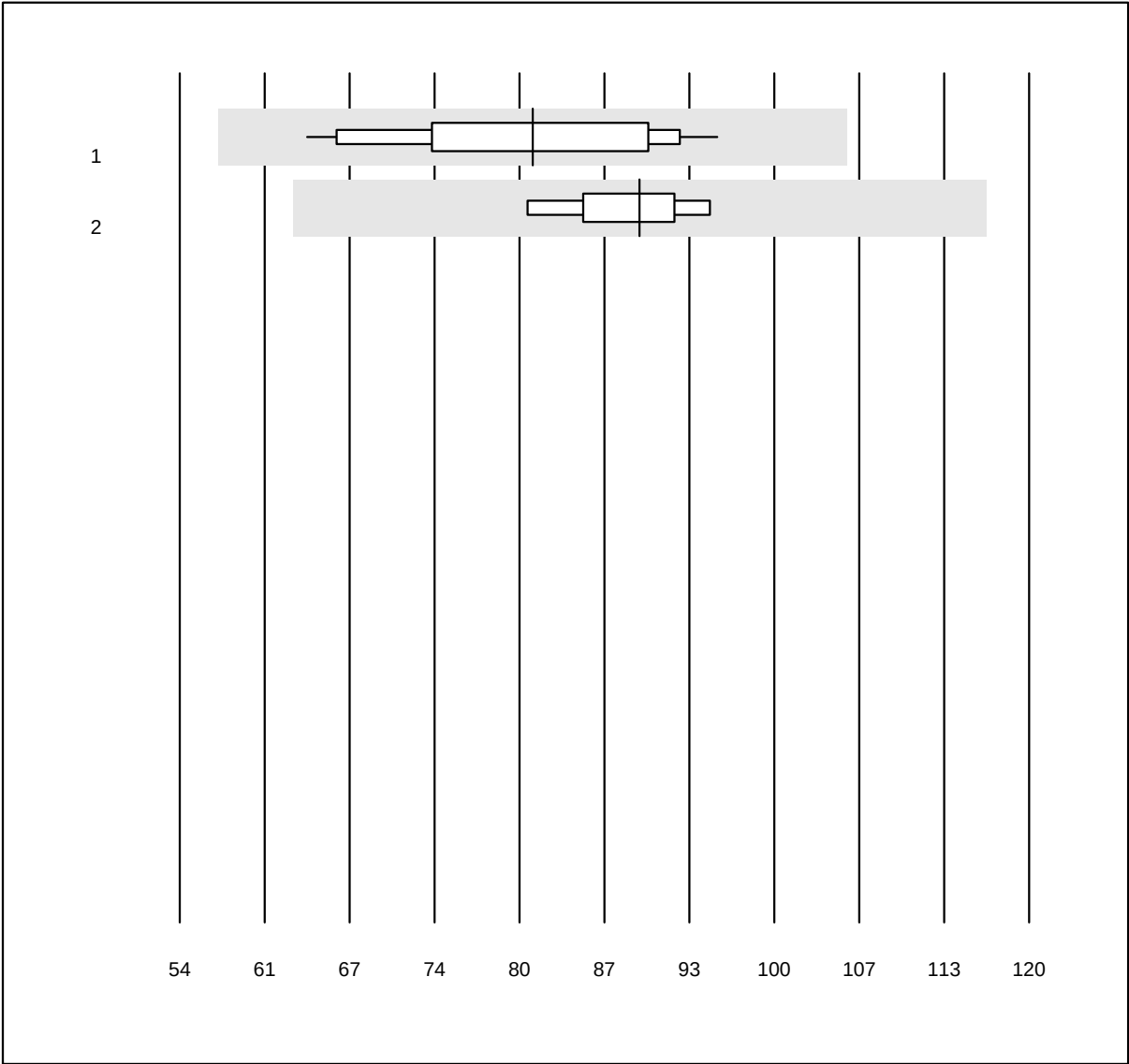


MQ Toleranz: 30%

eGFR Cockcroft-Gault ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	21	100.0	0.0	0.0	81	11.4	e
2 Spotchem	8	100.0	0.0	0.0	90	5.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

eGFR MDRD

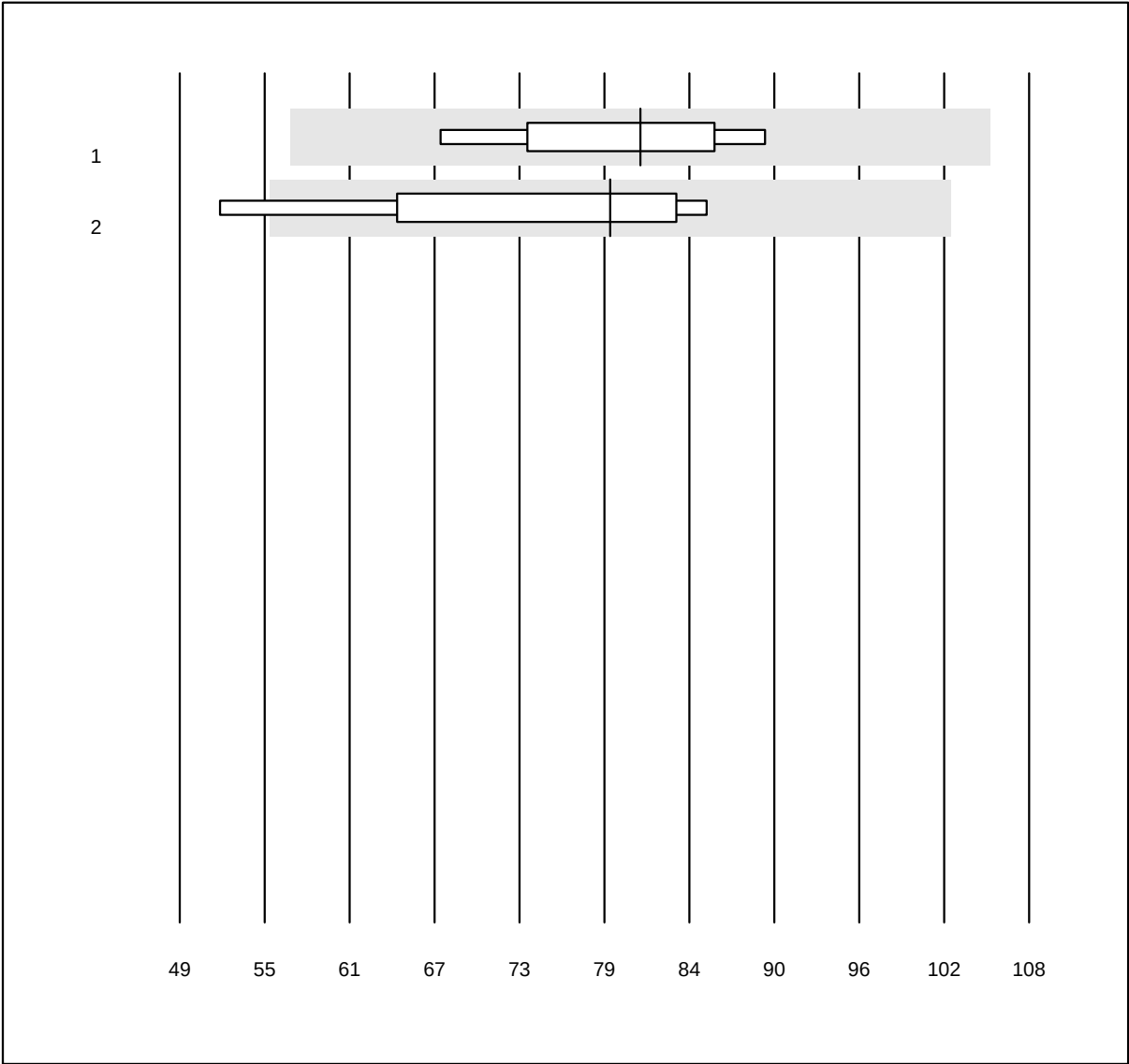


MQ Toleranz: 30%

eGFR MDRD ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	5	100.0	0.0	0.0	81	8.9	e*
2 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	79	14.3	e*

Ferro

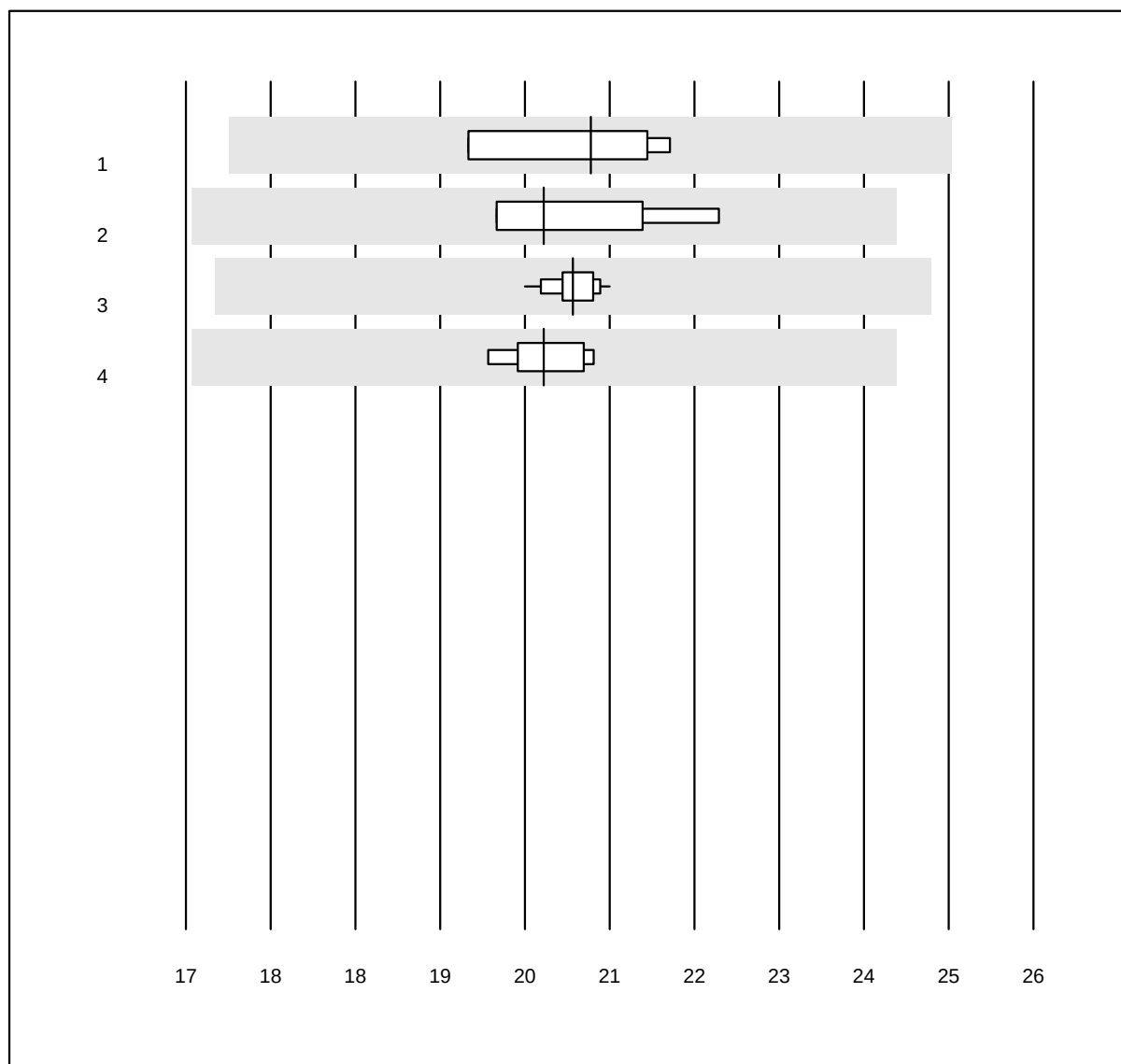


QUALAB Toleranz: 18%

Ferro ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	21	4.0	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	21	4.1	e
3 Roche	26	100.0	0.0	0.0	21	1.1	e
4 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	21	1.8	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Gamma-GT 1

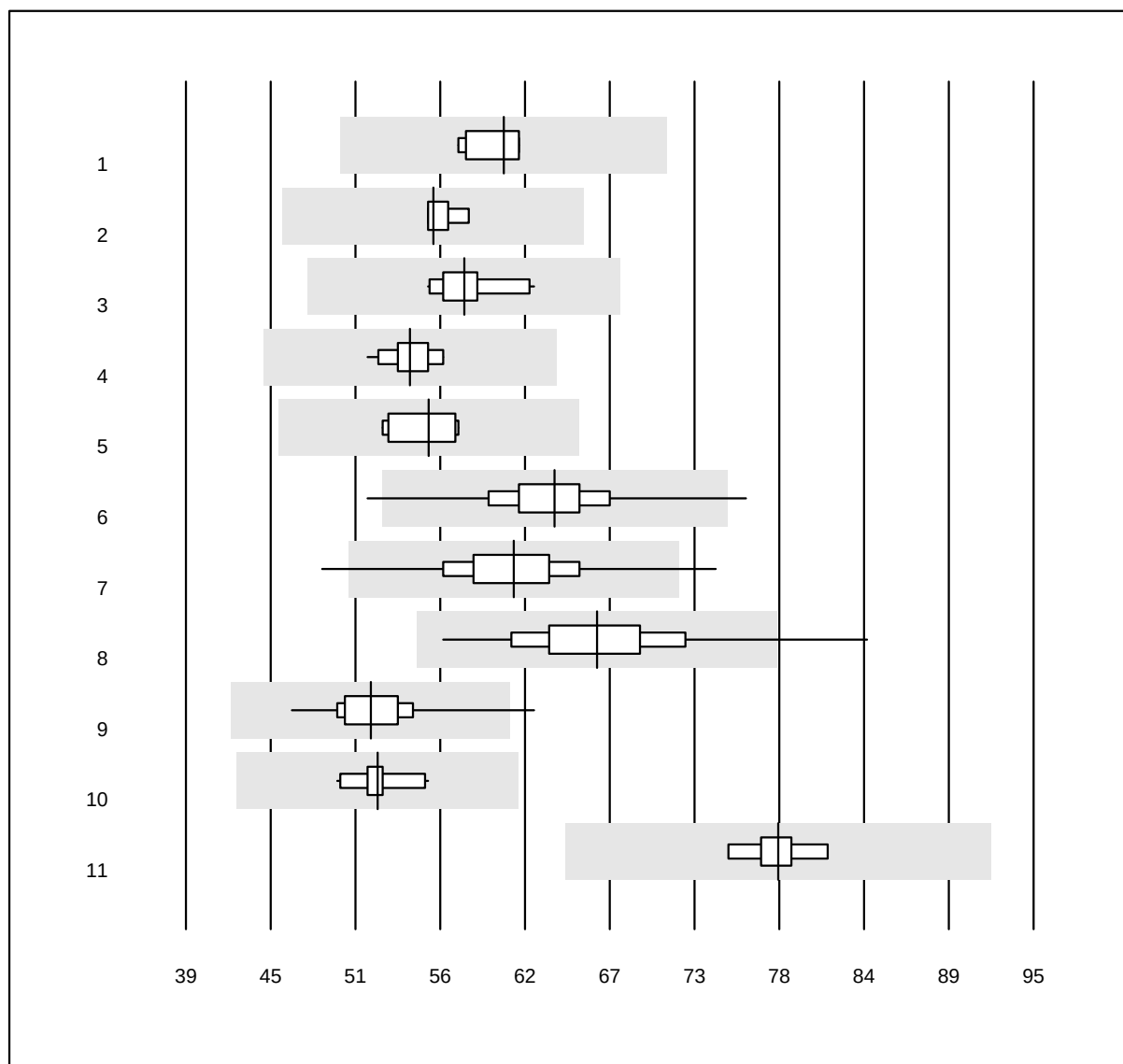


QUALAB Tolleranz: 18%

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	60	2.8	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	55	1.6	e
3 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	57	3.4	e
4 Autolyser	23	100.0	0.0	0.0	54	2.9	e
5 Selectra Pro	13	92.3	0.0	7.7	55	3.7	e
6 Fuji Dri-Chem	1167	99.4	0.2	0.4	63	4.9	e
7 Spotchem D-Concept	654	99.5	0.3	0.2	61	5.5	e
8 Spotchem SP-4430	115	97.4	1.7	0.9	66	7.4	e
9 Piccolo	57	96.5	3.5	0.0	51	5.3	e
10 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	52	3.2	e
11 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	78	2.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Gamma-GT 2

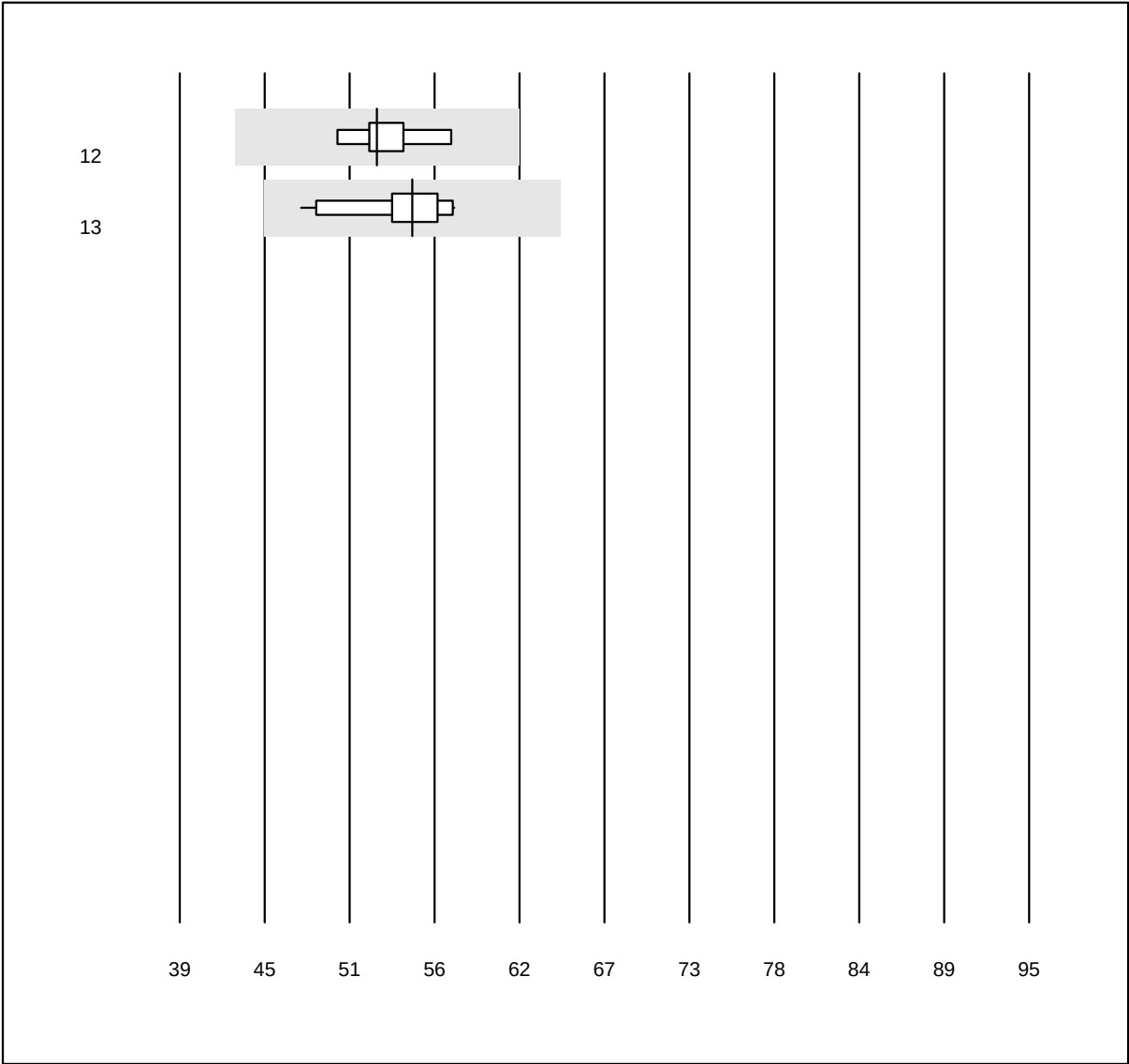


QUALAB Toleranz: 18%

Gamma-GT (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	52	3.8	e
13 Cobas	48	100.0	0.0	0.0	54	5.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio 1

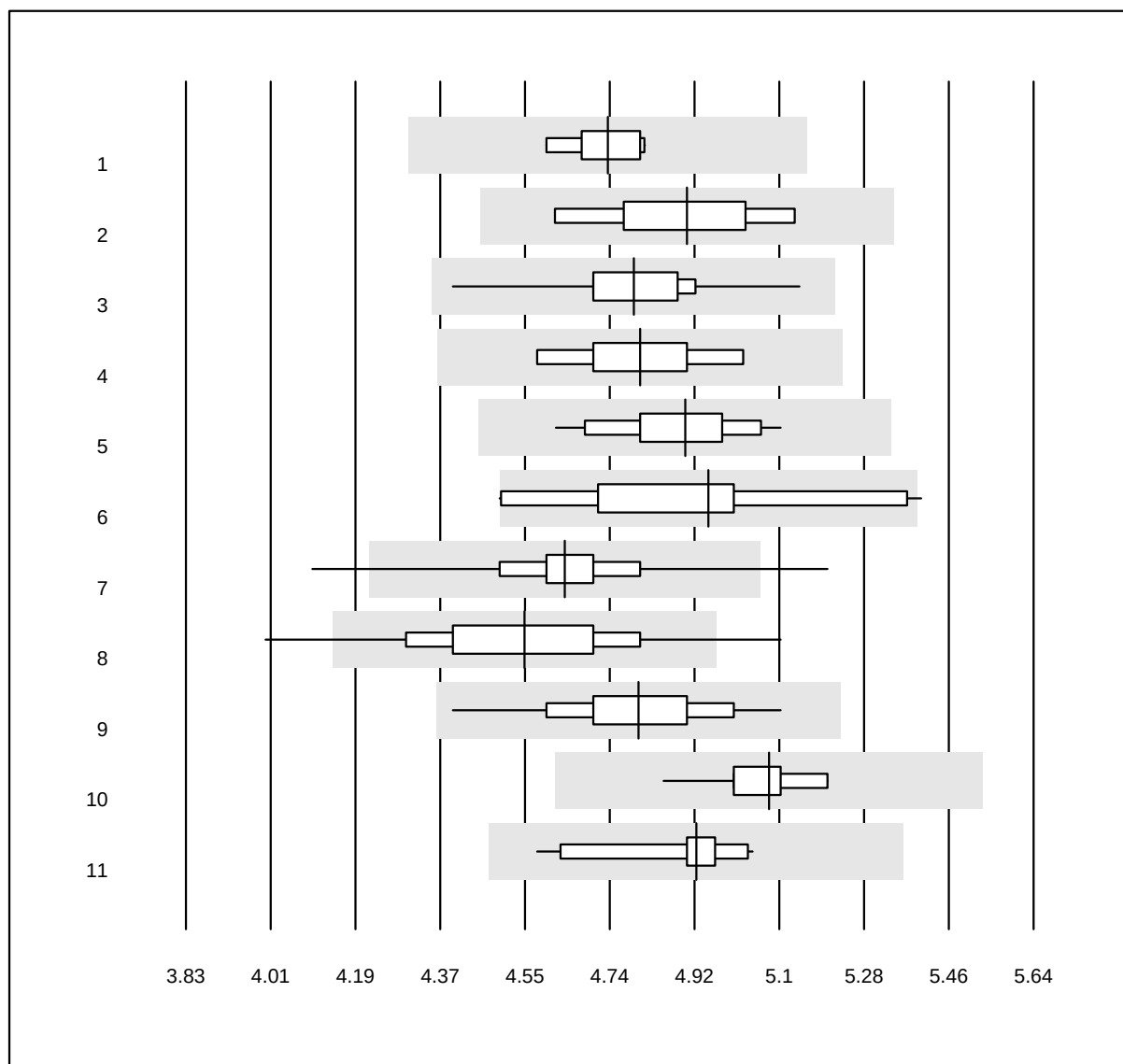


QUALAB Tolleranz: 9%

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	4.7	1.8	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	4.9	3.1	e*
3 Roche	51	100.0	0.0	0.0	4.8	2.4	e
4 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	4.8	2.9	e*
5 Autolyser	21	95.2	0.0	4.8	4.9	2.7	e
6 Selectra Pro	13	76.9	15.4	7.7	4.9	5.6	e*
7 Fuji Dri-Chem	1112	98.6	0.9	0.5	4.6	2.7	e
8 Spotchem D-Concept	616	96.6	2.9	0.5	4.6	3.9	e
9 Spotchem SP-4430	90	97.8	0.0	2.2	4.8	3.3	e
10 Piccolo	71	100.0	0.0	0.0	5.1	1.5	e
11 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	4.9	2.4	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio 2

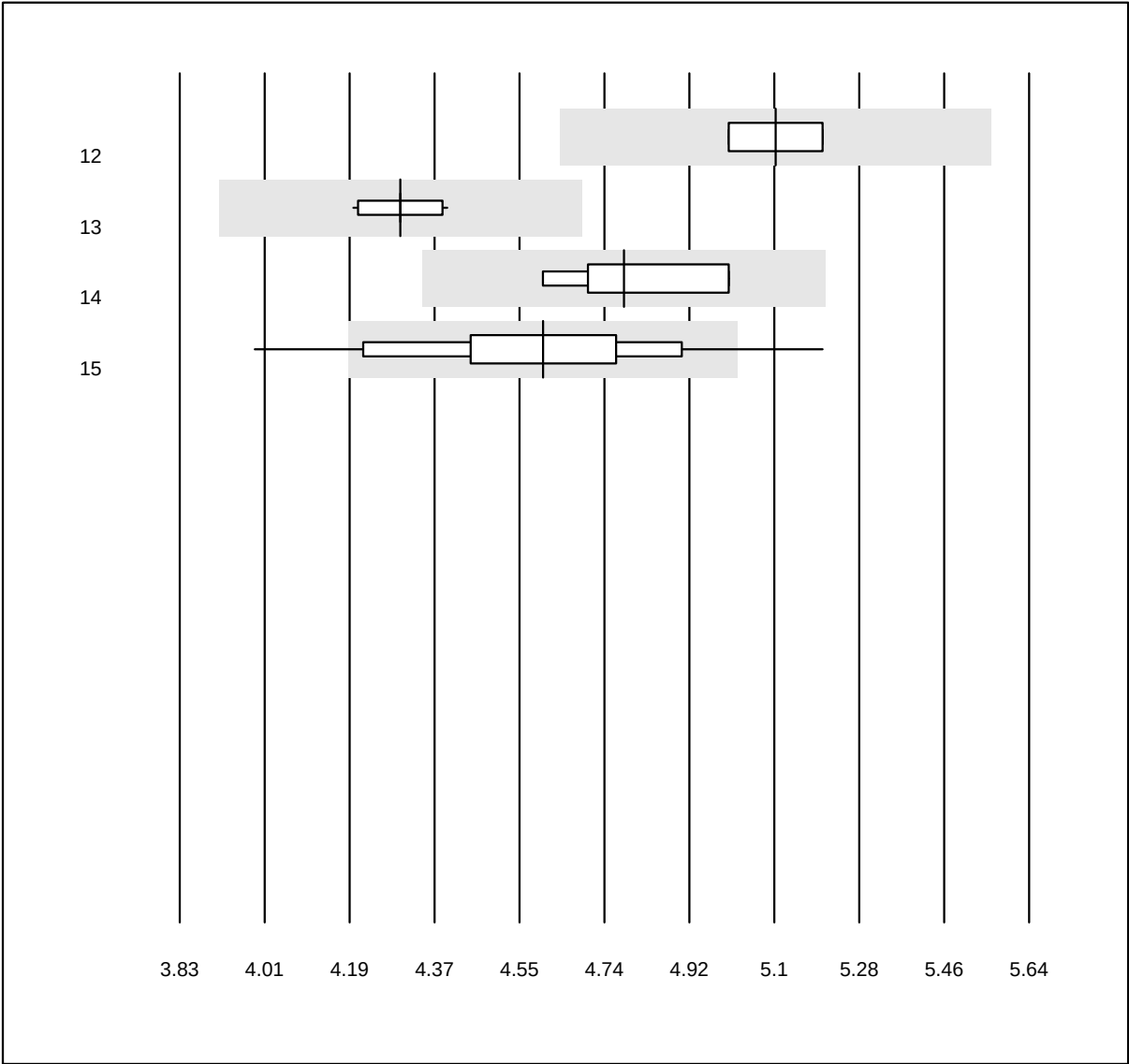


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	5.1	1.8	e
13 iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	4.3	1.1	e
14 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	4.8	3.0	e*
15 Cholestech LDX	198	83.8	10.1	6.1	4.6	5.3	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio BGM 1

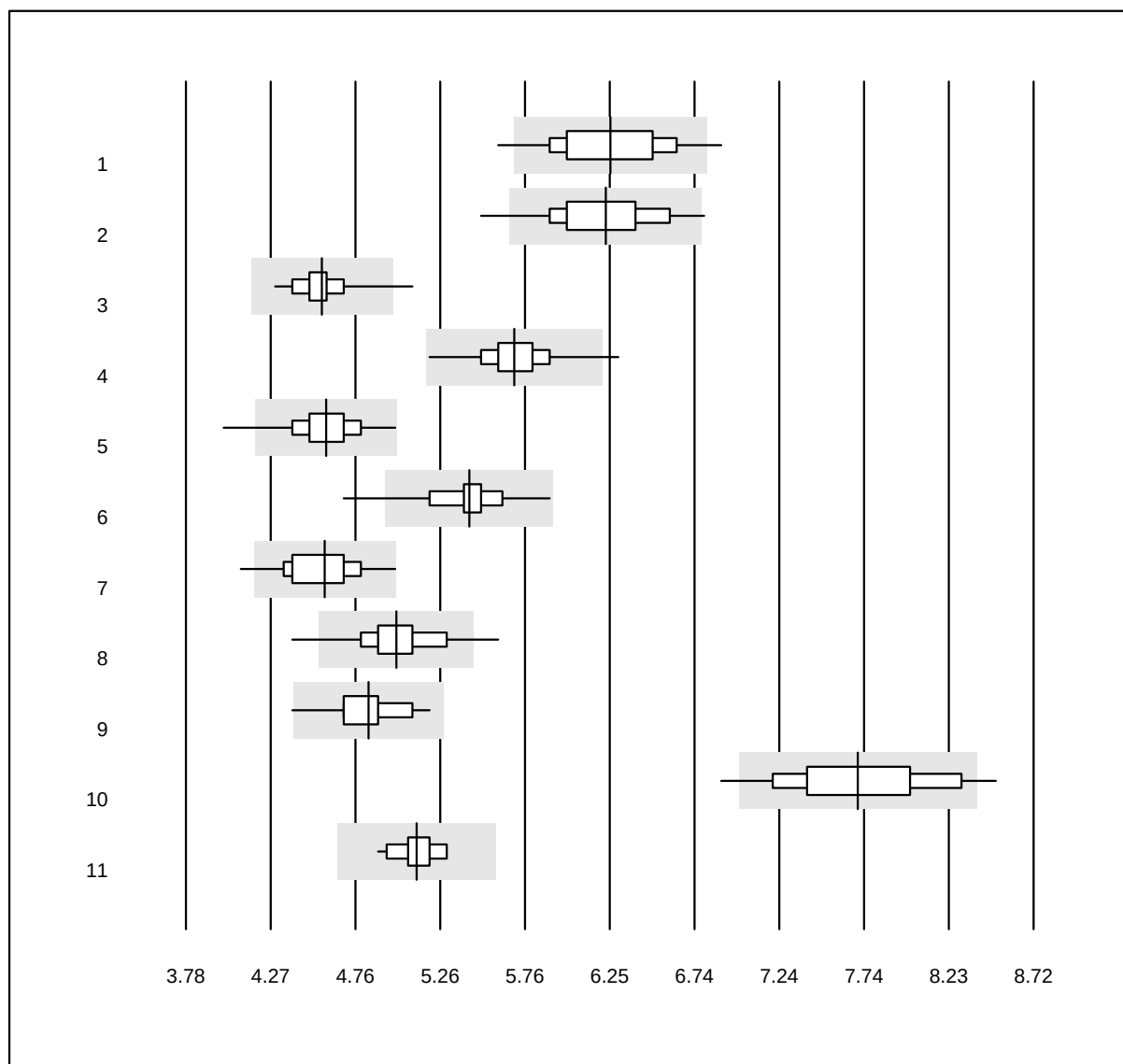


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio BGM (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Hemocue 201RT P-equiv	141	94.3	1.4	4.3	6.3	4.5	e
2 Hemocue 201+ P-equiv	147	91.8	5.4	2.7	6.2	4.5	e
3 Cobas Pulse	350	98.0	2.0	0.0	4.6	2.8	e
4 Accu-Chek Inform 2	921	99.5	0.2	0.3	5.7	2.4	e
5 Accu-Check Guide	342	98.5	0.6	0.9	4.6	3.5	e
6 Accu-Chek Aviva	81	91.4	1.2	7.4	5.4	3.4	e
7 Accu-Chek Instant	136	96.3	2.2	1.5	4.6	4.1	e
8 Contour NEXT/XT	1526	97.6	1.3	1.1	5.0	3.9	e
9 Statstrip/Xpress	111	99.1	0.9	0.0	4.8	3.2	e
10 Healthpro	24	87.5	8.3	4.2	7.7	5.3	e
11 Alpha Check	14	100.0	0.0	0.0	5.1	2.2	e

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio BGM 2

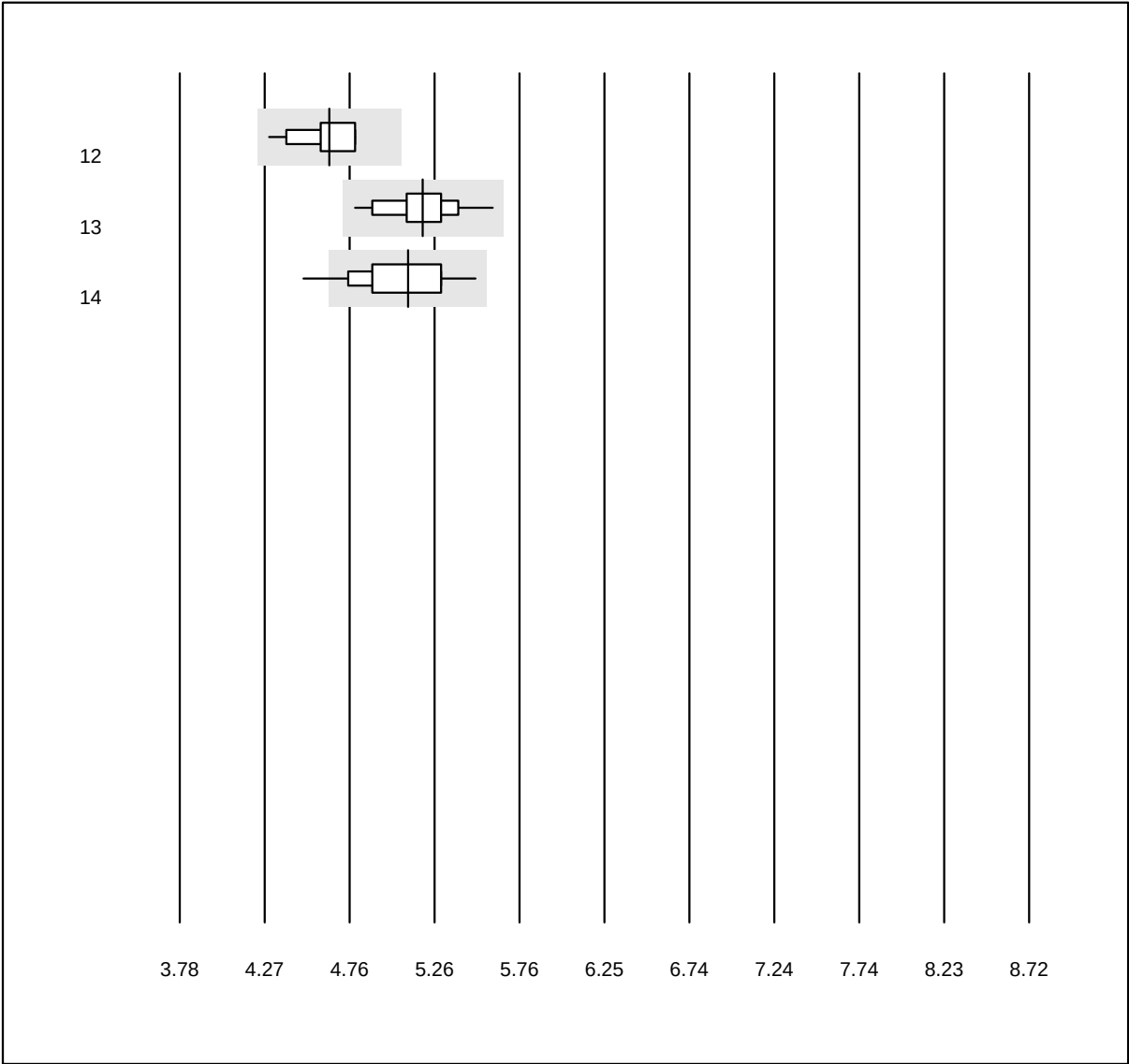


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio BGM (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 OneTouch Verio	31	100.0	0.0	0.0	4.7	3.2	e
13 Mylife UNIO	108	100.0	0.0	0.0	5.2	3.7	e
14 mylife Pura	35	94.3	5.7	0.0	5.1	4.4	e

8 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Acido urico 1

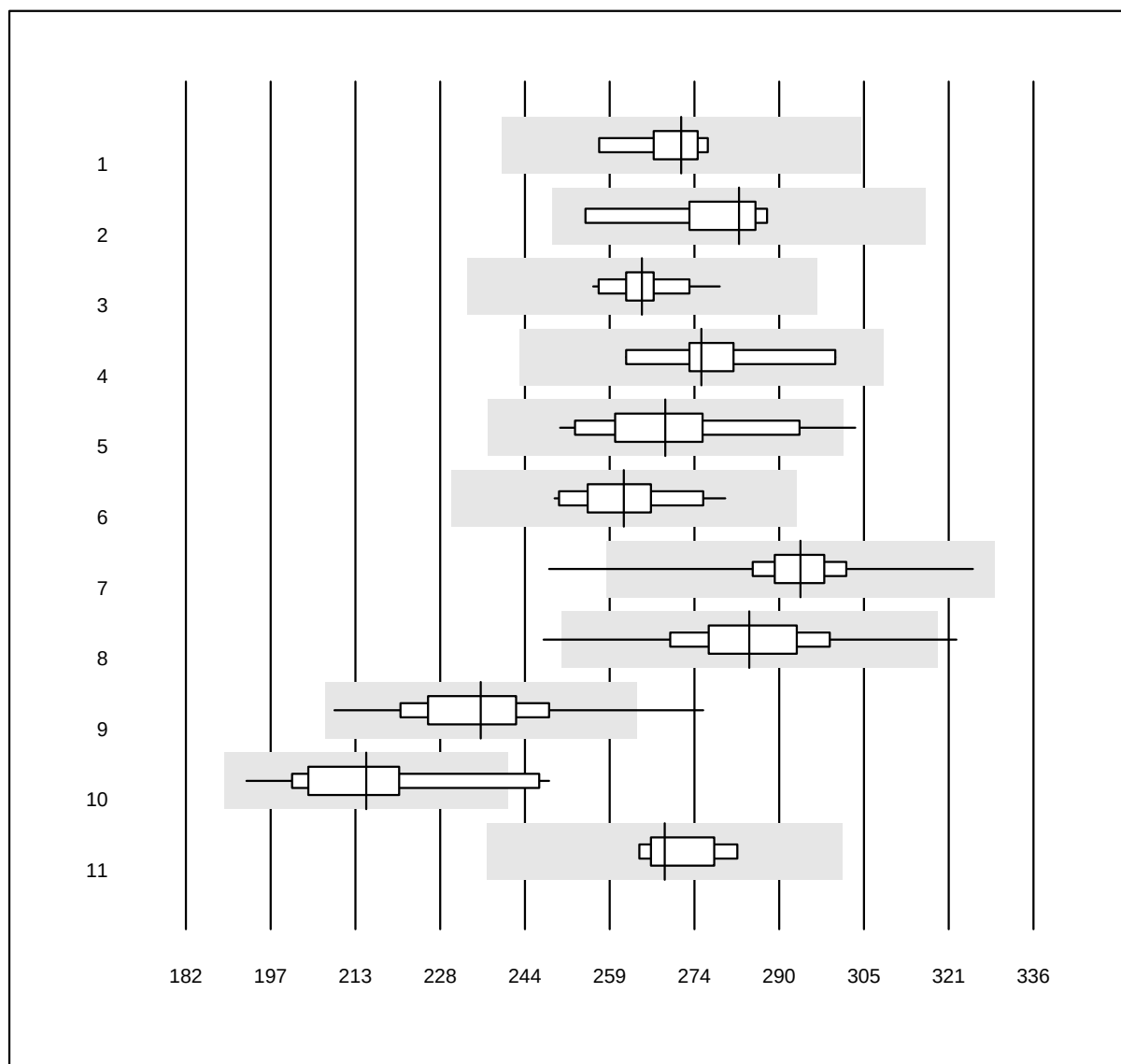


QUALAB Toleranz: 12%

Acido urico ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	272	2.3	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	283	3.6	e*
3 Roche	44	100.0	0.0	0.0	265	2.0	e
4 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	276	3.7	e
5 Autolyser	20	95.0	5.0	0.0	269	5.1	e
6 Selectra Pro	13	100.0	0.0	0.0	262	3.2	e
7 Fuji Dri-Chem	1080	99.2	0.3	0.6	294	2.6	e
8 Spotchem D-Concept	616	98.7	0.6	0.6	284	4.0	e
9 Spotchem SP-4430	88	90.9	3.4	5.7	236	5.3	e
10 Piccolo	32	75.0	12.5	12.5	215	7.1	e
11 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	269	2.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Acido urico 2

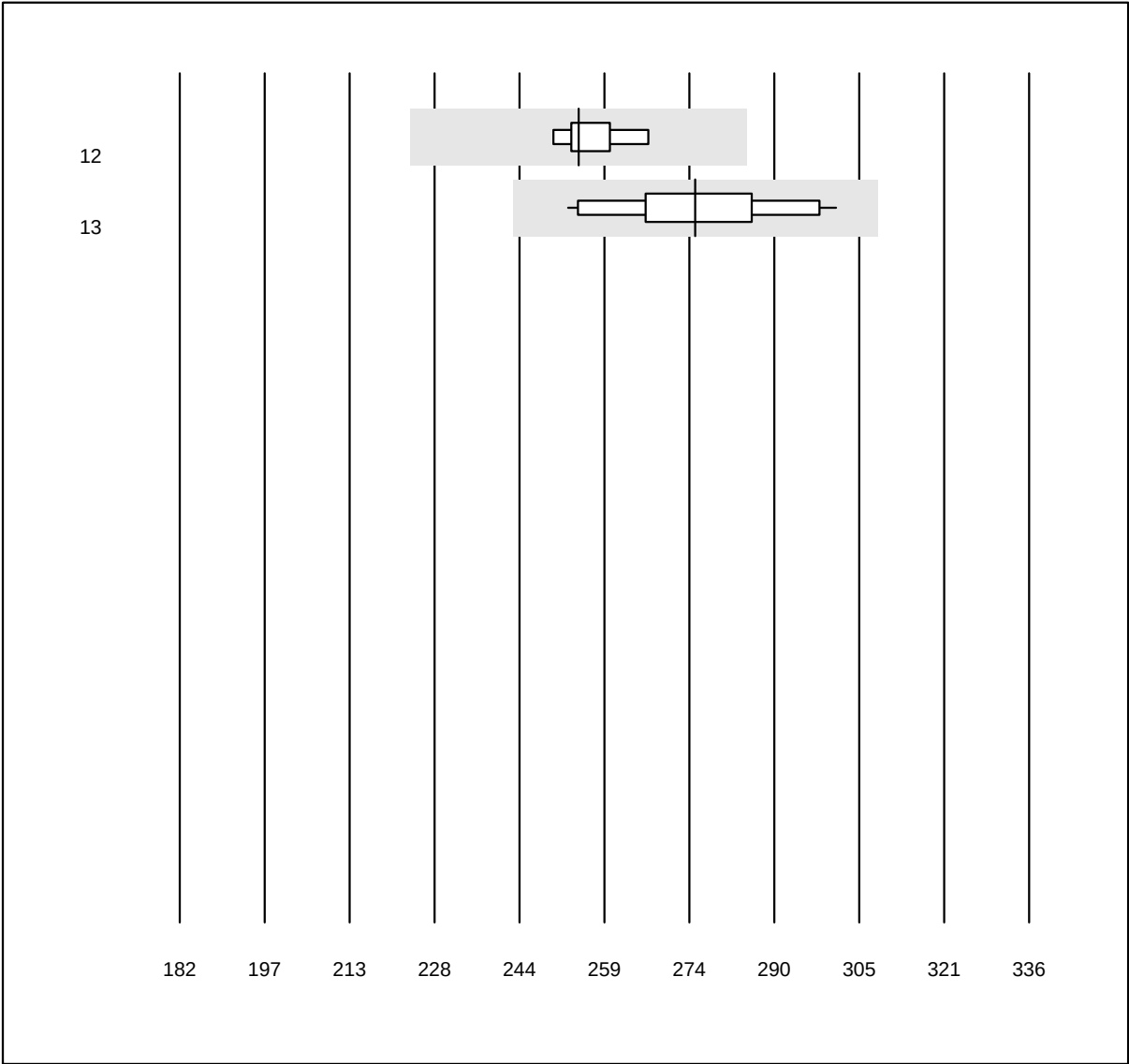


QUALAB Toleranz: 12%

Acido urico ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	254	2.1	e
13 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	275	4.9	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Urea 1

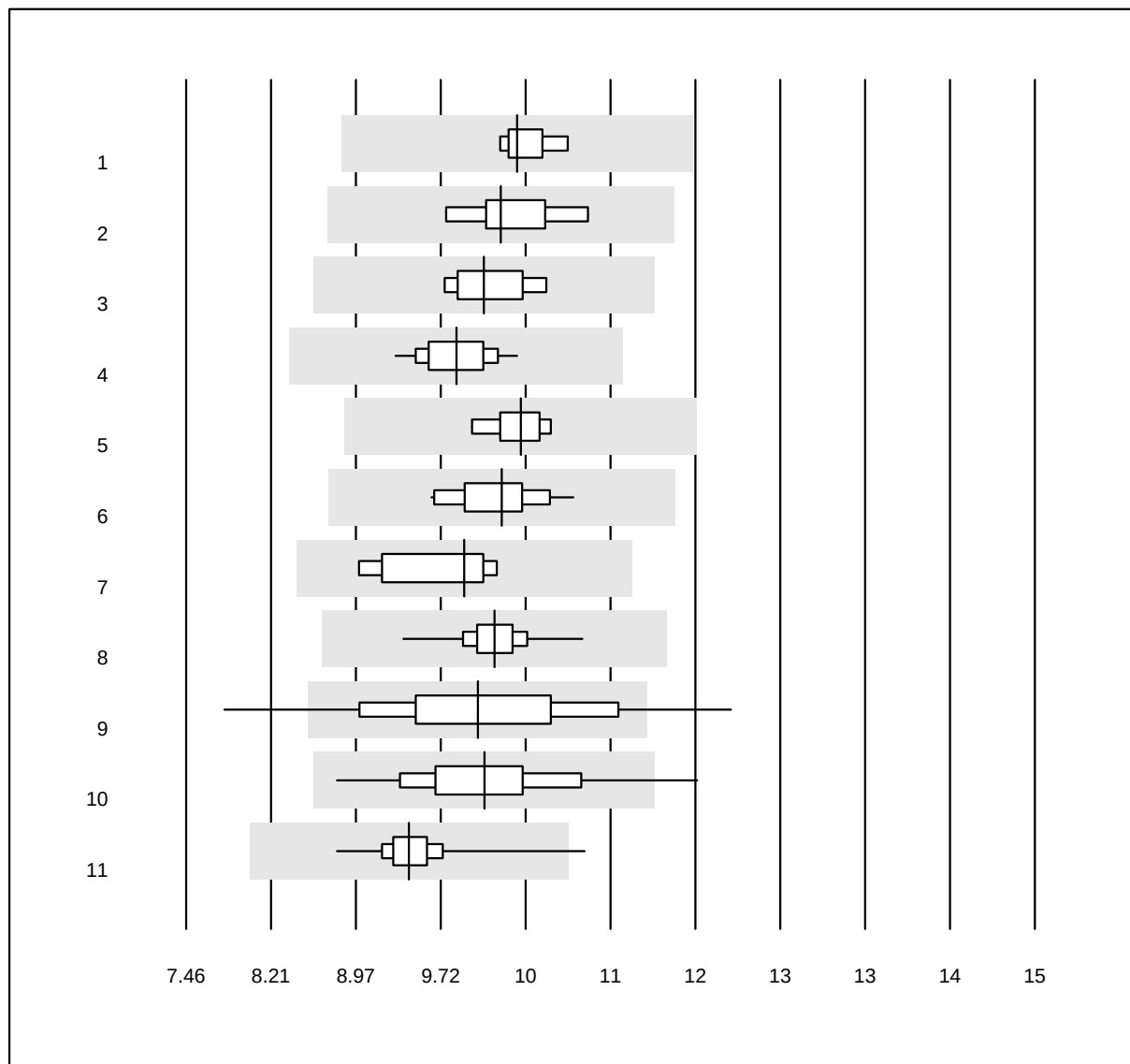


QUALAB Toleranz: 15%

Urea (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 EPOC	6	66.7	0.0	33.3	10.4	1.7	e
2 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	10.3	3.6	e
3 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	10.1	3.2	e
4 Roche	46	100.0	0.0	0.0	9.9	2.7	e
5 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	10.4	2.2	e
6 Autolyser	18	94.4	0.0	5.6	10.3	3.4	e
7 Selectra Pro	8	87.5	0.0	12.5	9.9	4.8	e
8 Fuji Dri-Chem	635	99.7	0.0	0.3	10.2	2.3	e
9 Spotchem D-Concept	346	92.2	7.2	0.6	10.1	8.5	e
10 Spotchem SP-4430	42	97.6	2.4	0.0	10.1	6.2	e
11 Piccolo	66	97.0	1.5	1.5	9.4	3.4	e

Urea 2

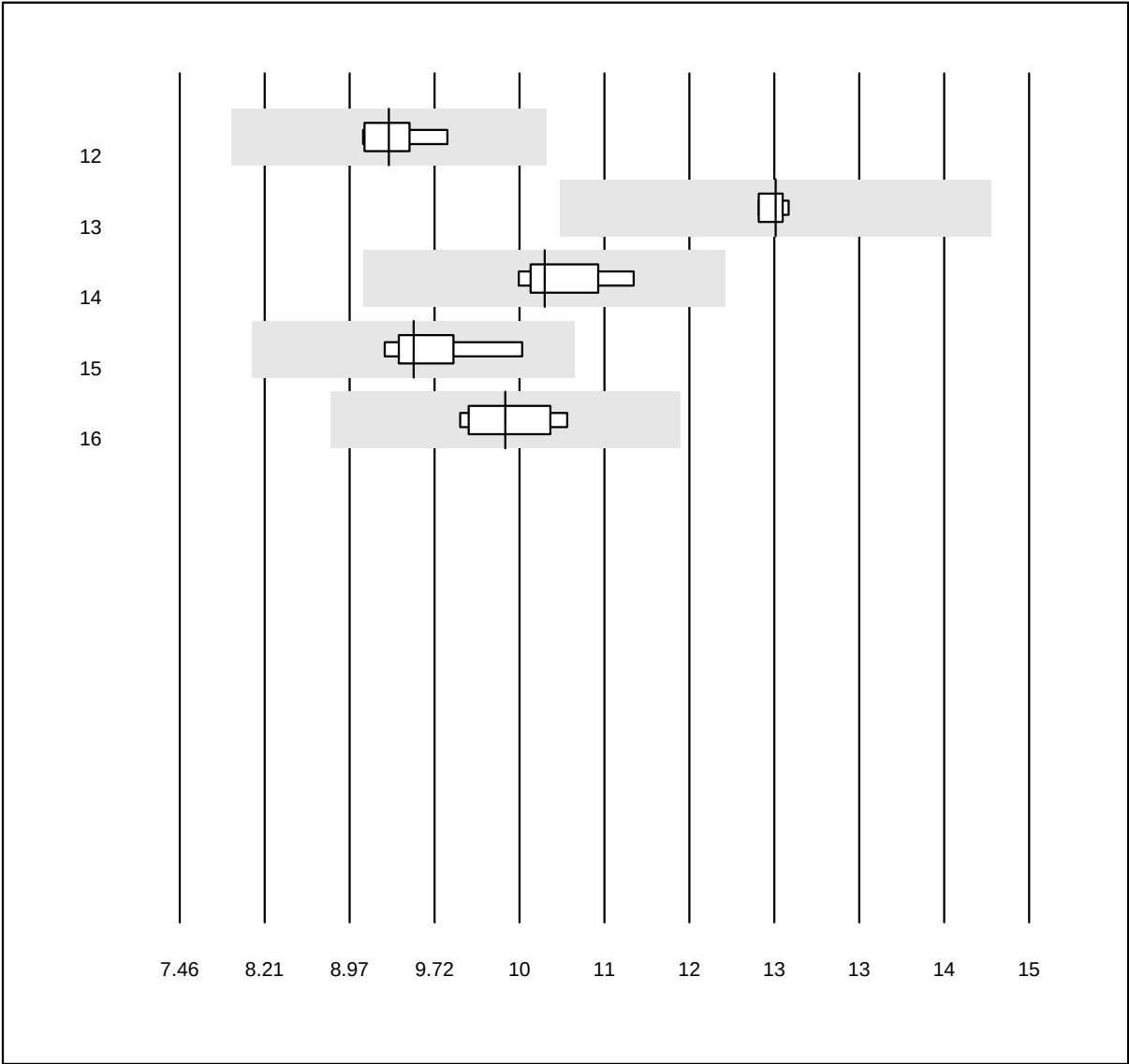


QUALAB Toleranz: 15%

Urea (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	9.3	2.6	e
13 iStat Chem8	6	100.0	0.0	0.0	12.8	0.9	e
14 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	10.7	3.2	e
15 Seamaty	9	100.0	0.0	0.0	9.5	3.9	e
16 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	10.3	3.7	e*

Potassio 1

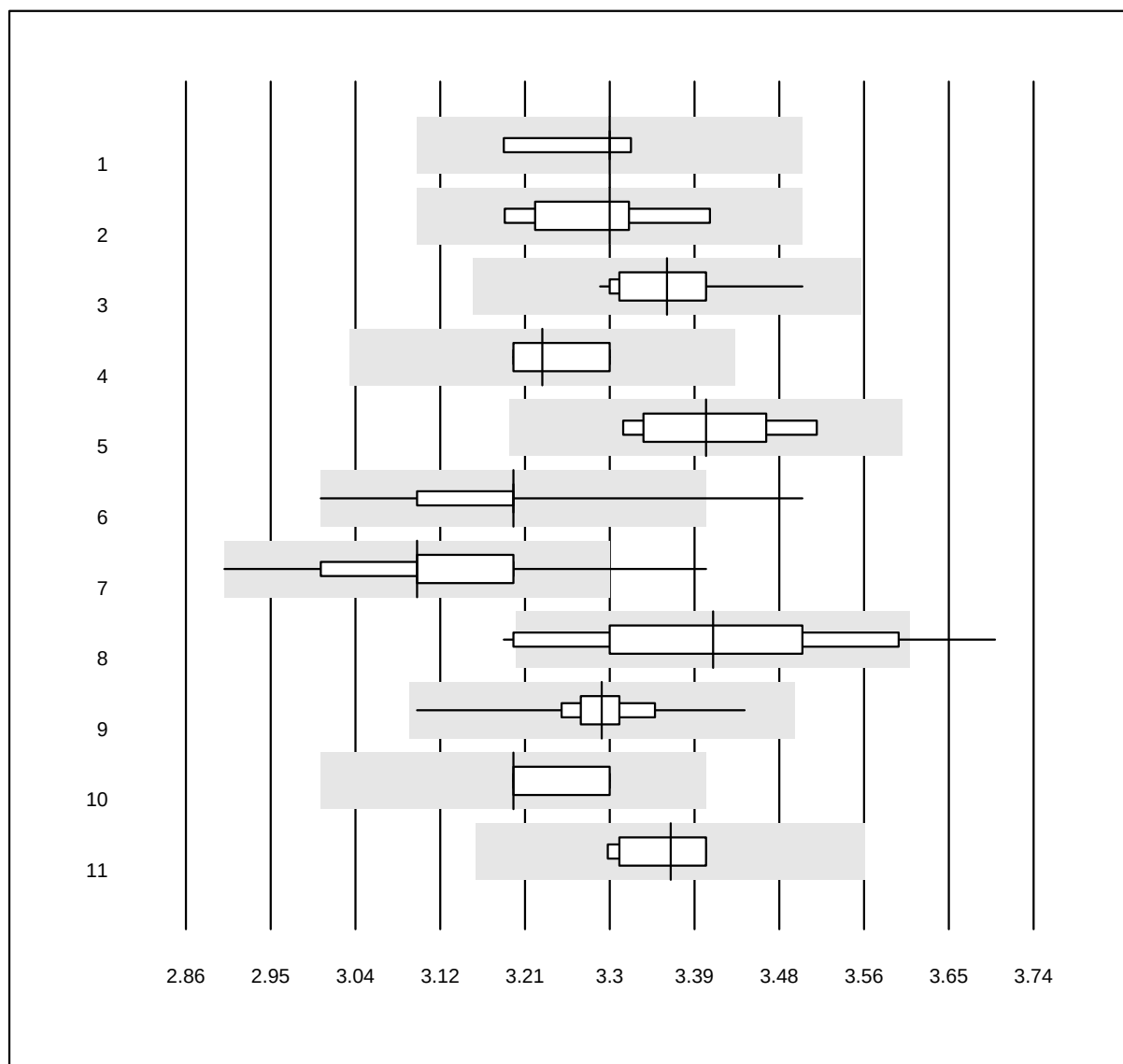


QUALAB Toleranz: 6%

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	3.30	1.1	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	3.30	1.9	e*
3 Roche	47	100.0	0.0	0.0	3.36	1.4	e
4 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	3.23	1.5	e
5 Autolyser	6	100.0	0.0	0.0	3.40	2.0	e*
6 Fuji Dri-Chem	1127	97.5	1.8	0.7	3.20	1.5	e
7 Spotchem D-Concept	507	92.1	3.2	4.7	3.10	2.5	e
8 Piccolo	38	55.3	13.2	31.6	3.41	4.3	e
9 Exias	114	98.2	0.0	1.8	3.29	1.2	e
10 iStat Chem8	11	100.0	0.0	0.0	3.20	1.4	e
11 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	3.36	1.3	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Potassio 2

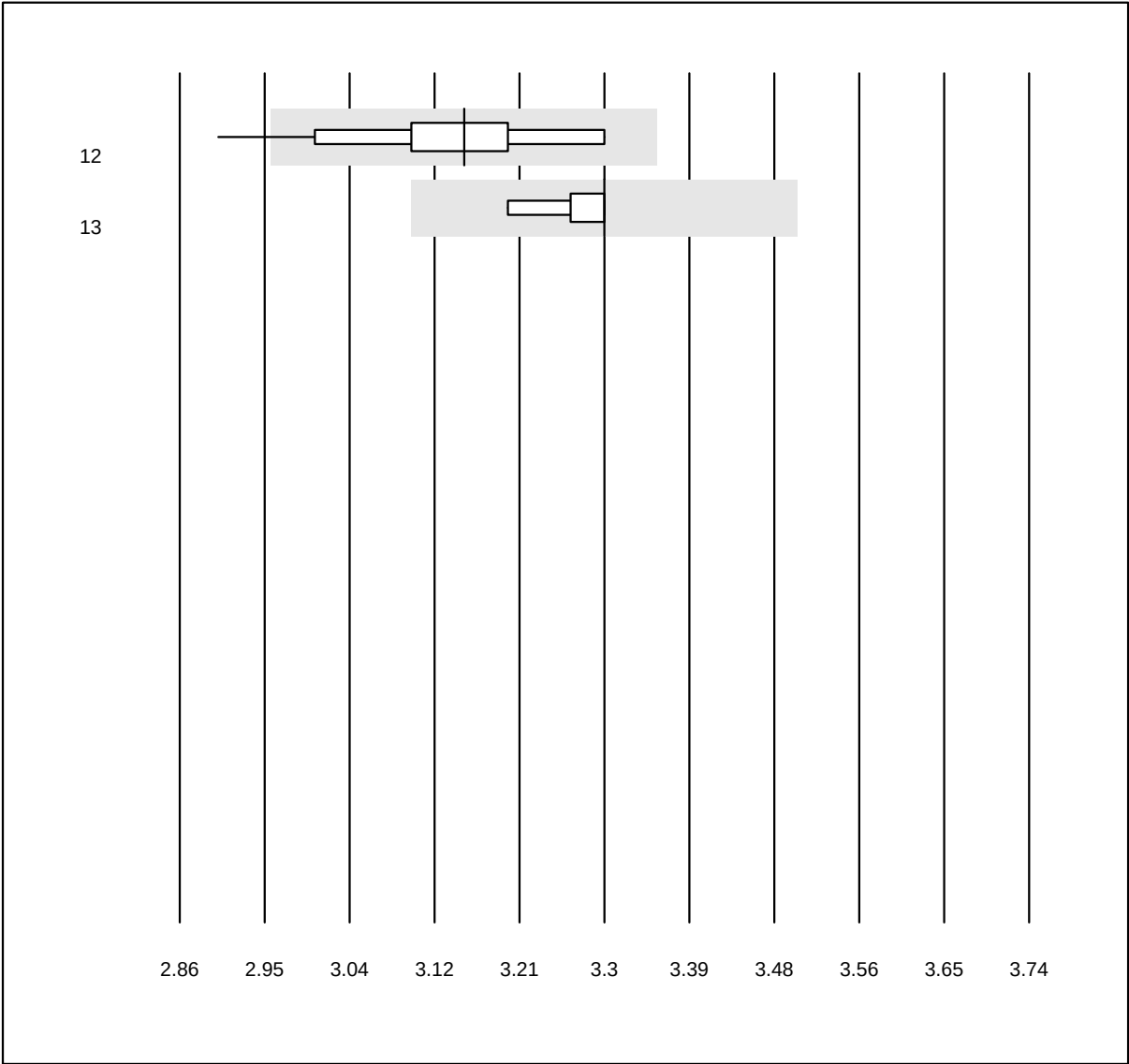


QUALAB Toleranz: 6%
(< 3.3: +/- 0.2 mmol/l)

Potassio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Spotchem EL-SE 1520	61	95.1	1.6	3.3	3.15	2.9	e
13 i-Smart 30 PRO	17	100.0	0.0	0.0	3.30	1.2	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatina chinasi 1

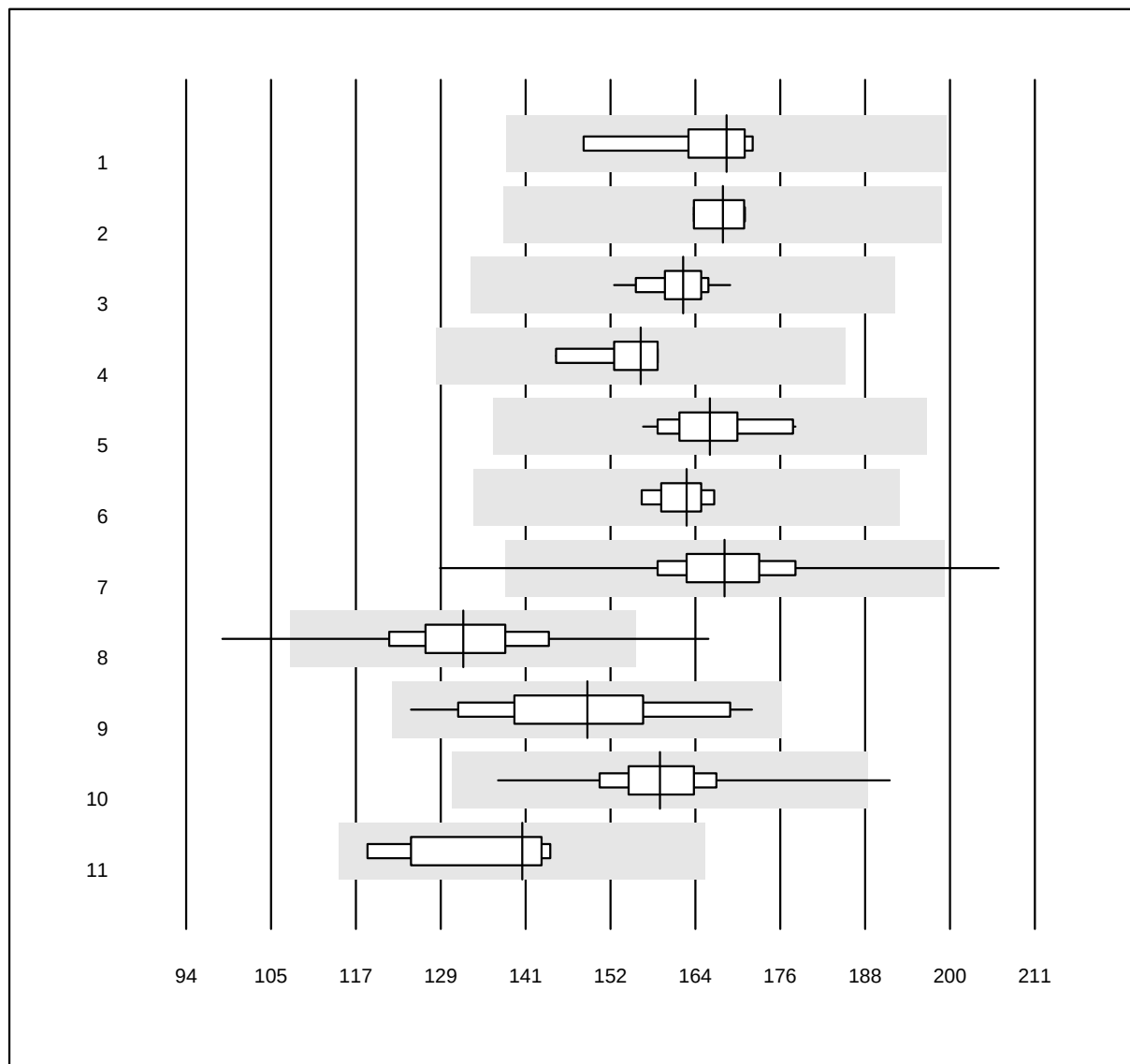


QUALAB Tolleranz: 18%

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	169	4.4	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	168	1.9	e
3 Roche	44	100.0	0.0	0.0	163	2.3	e
4 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	157	3.0	e
5 Autolyser	19	100.0	0.0	0.0	166	3.4	e
6 Selectra Pro	5	100.0	0.0	0.0	163	1.9	e
7 Fuji Dri-Chem	682	98.5	0.7	0.7	168	5.1	e
8 Spotchem D-Concept	323	98.8	1.2	0.0	132	6.7	e
9 Spotchem SP-4430	35	97.1	0.0	2.9	149	8.5	e
10 Piccolo	23	91.3	4.3	4.3	159	6.0	e
11 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	140	7.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatina chinasi 2

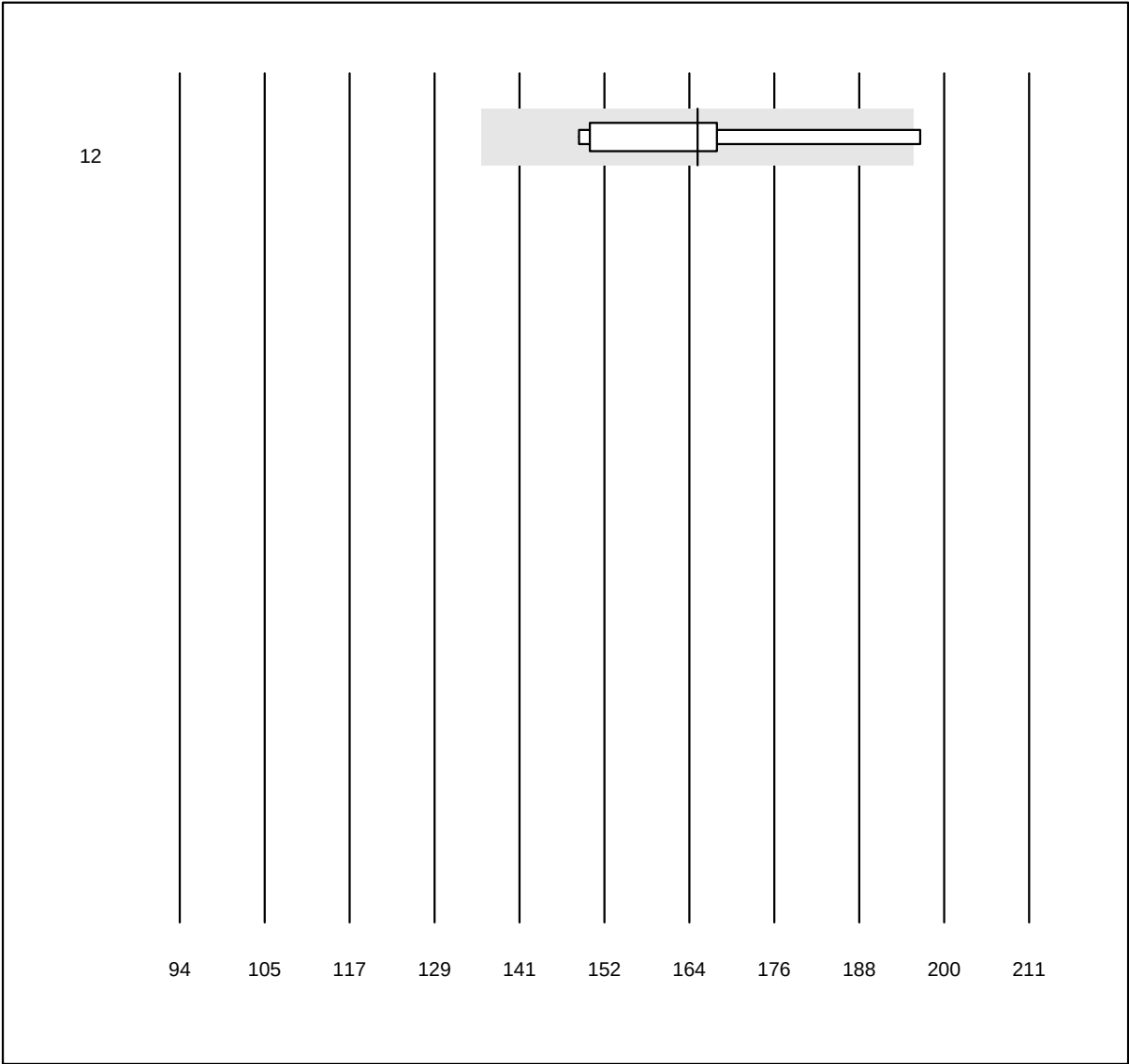


QUALAB Toleranz: 18%

Creatina chinasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Seamaty	9	88.9	11.1	0.0	165	8.8	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatinina 1

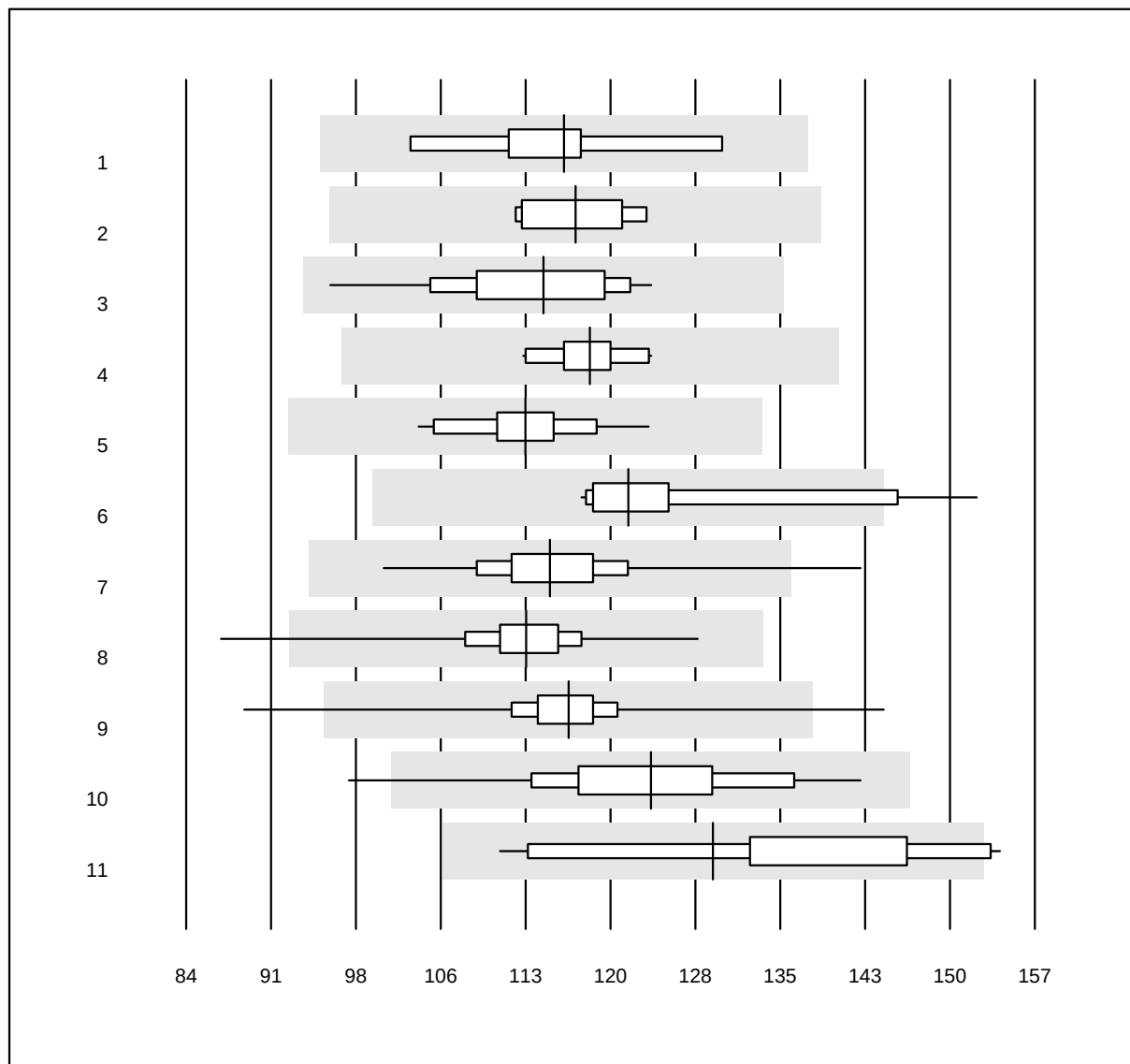


QUALAB Tolleranz: 18%

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	117	6.1	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	118	3.8	e
3 Roche	47	100.0	0.0	0.0	115	5.8	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	119	2.8	e
5 Autolyser	23	95.7	0.0	4.3	113	4.2	e
6 Selectra Pro	14	85.7	7.1	7.1	122	7.5	e
7 Fuji Dri-Chem	1196	99.1	0.4	0.5	115	4.7	e
8 Spotchem D-Concept	670	99.0	0.1	0.9	113	3.7	e
9 Spotchem SP-4430	128	98.4	1.6	0.0	117	4.2	e
10 Piccolo	68	94.1	2.9	2.9	124	7.5	e
11 EPOC	21	71.4	9.5	19.0	129	8.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatinina 2

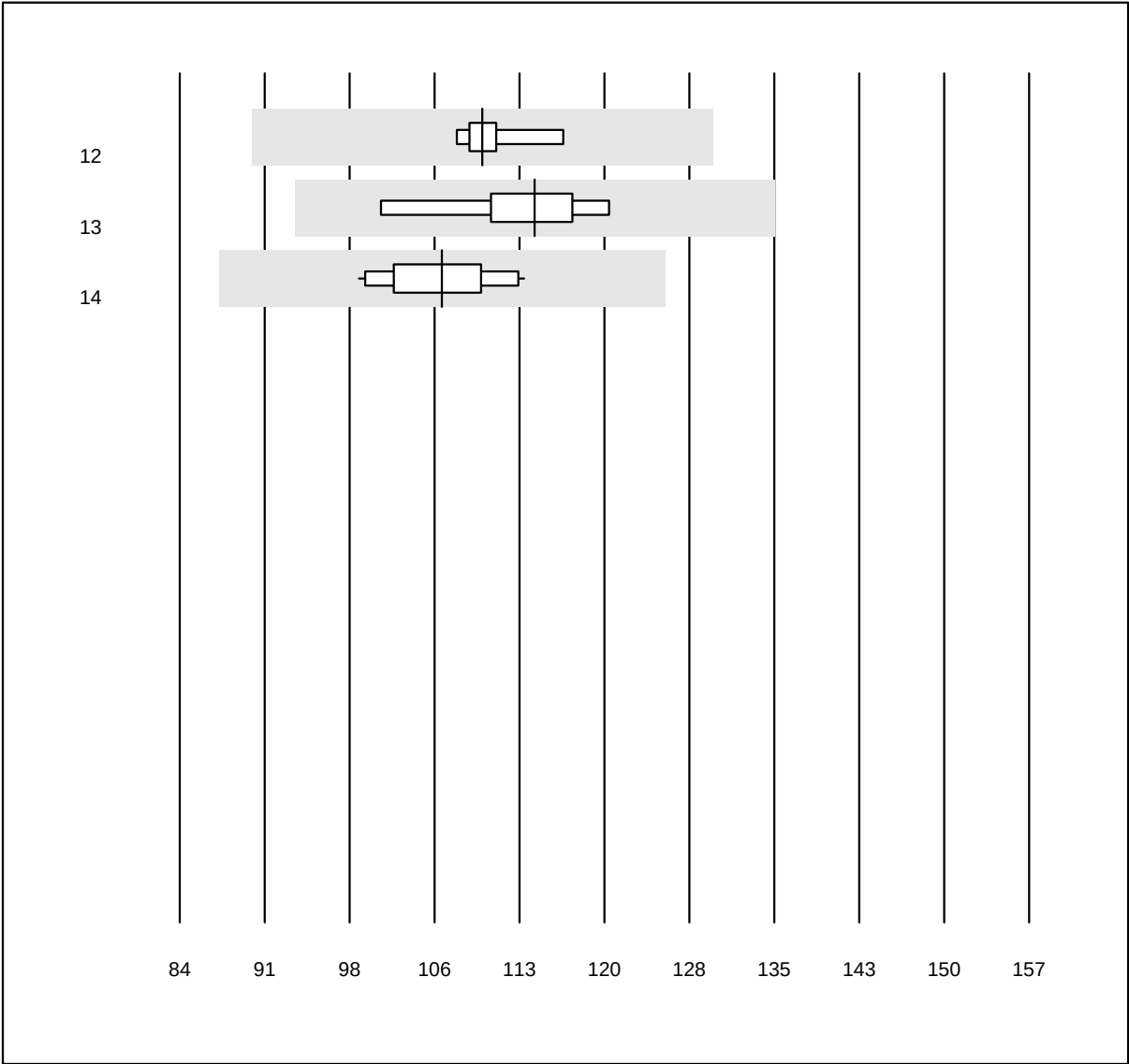


QUALAB Toleranz: 18%

Creatinina (µmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	110	2.3	e
13 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	115	4.8	e
14 Seamaty	11	100.0	0.0	0.0	107	4.2	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatinina E

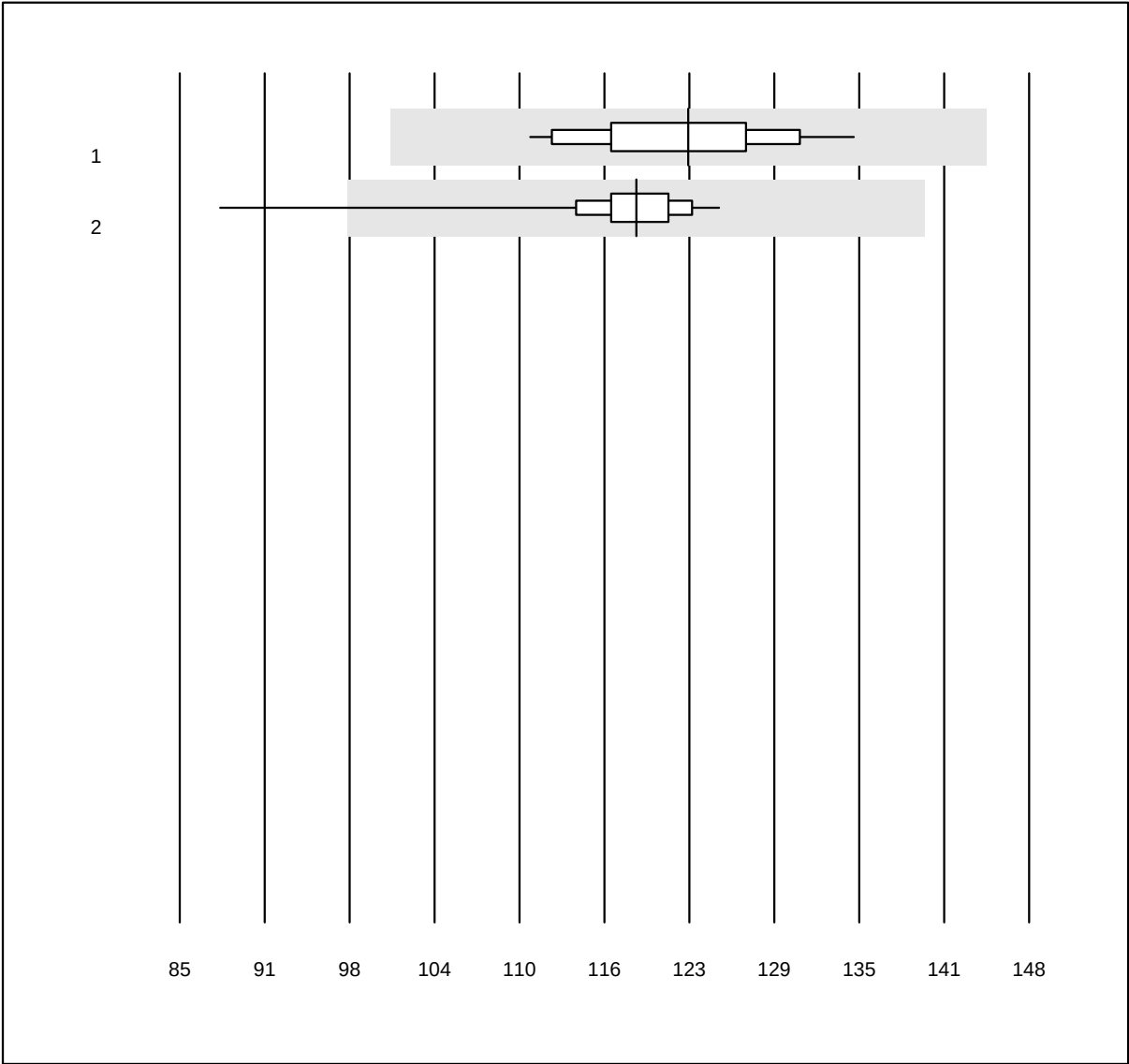


QUALAB Toleranz: 18%

Creatinina E ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	18	94.4	0.0	5.6	123	5.3	e
2 iStat Chem8	47	95.7	2.1	2.1	119	4.6	e

Lattato

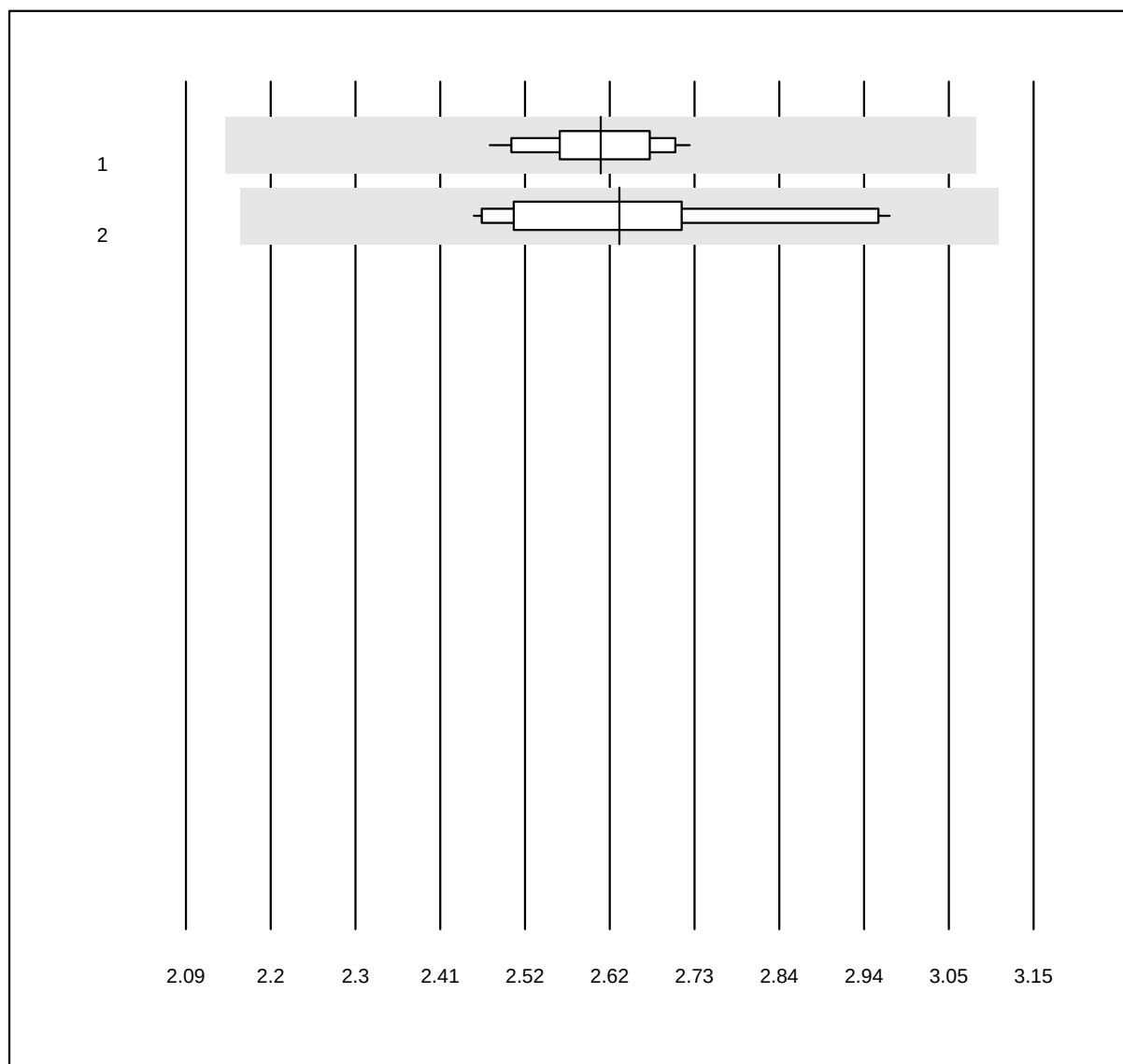


QUALAB Toleranz: 18%

Lattato (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	18	100.0	0.0	0.0	2.61	2.8	e
2 altri metodi	11	100.0	0.0	0.0	2.63	6.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

LDH

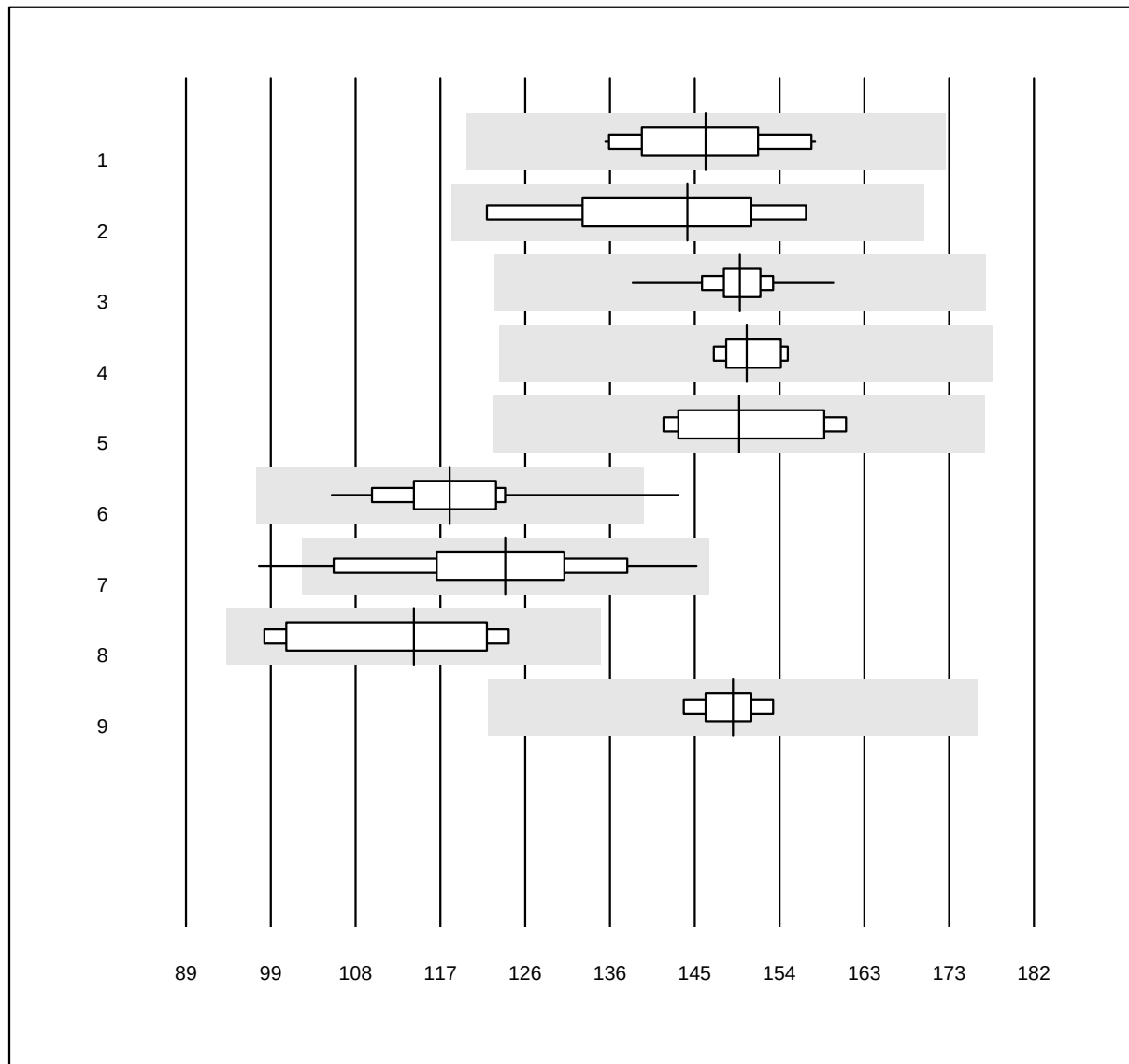


QUALAB Toleranz: 18%

LDH (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	146	5.1	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	144	7.0	e*
3 Roche	45	100.0	0.0	0.0	150	2.4	e
4 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	151	2.0	e
5 Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	150	5.1	e
6 Fuji Dri-Chem	87	93.1	2.3	4.6	118	5.6	e
7 Spotchem D-Concept	25	92.0	8.0	0.0	124	9.3	e
8 Spotchem SP-4430	8	87.5	0.0	12.5	114	9.4	e*
9 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	149	2.1	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Colesterolo LDL

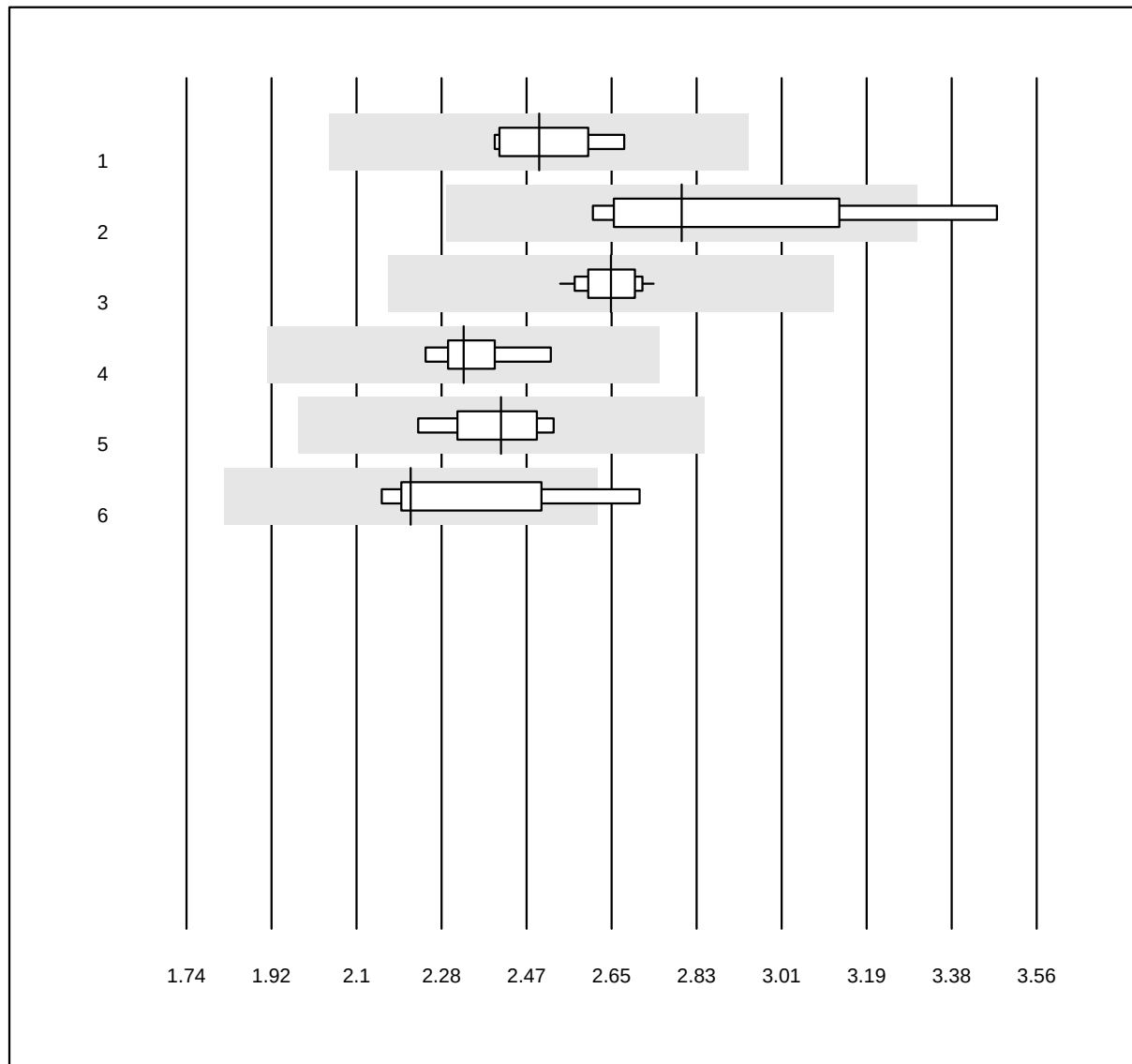


QUALAB Toleranz: 18%

Colesterolo LDL (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	2.5	4.0	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	2.8	9.7	a*
3 Roche	26	100.0	0.0	0.0	2.6	2.2	e
4 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	2.3	3.6	e
5 Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	2.4	3.9	e
6 Selectra	6	83.3	16.7	0.0	2.2	8.2	e*

Litio

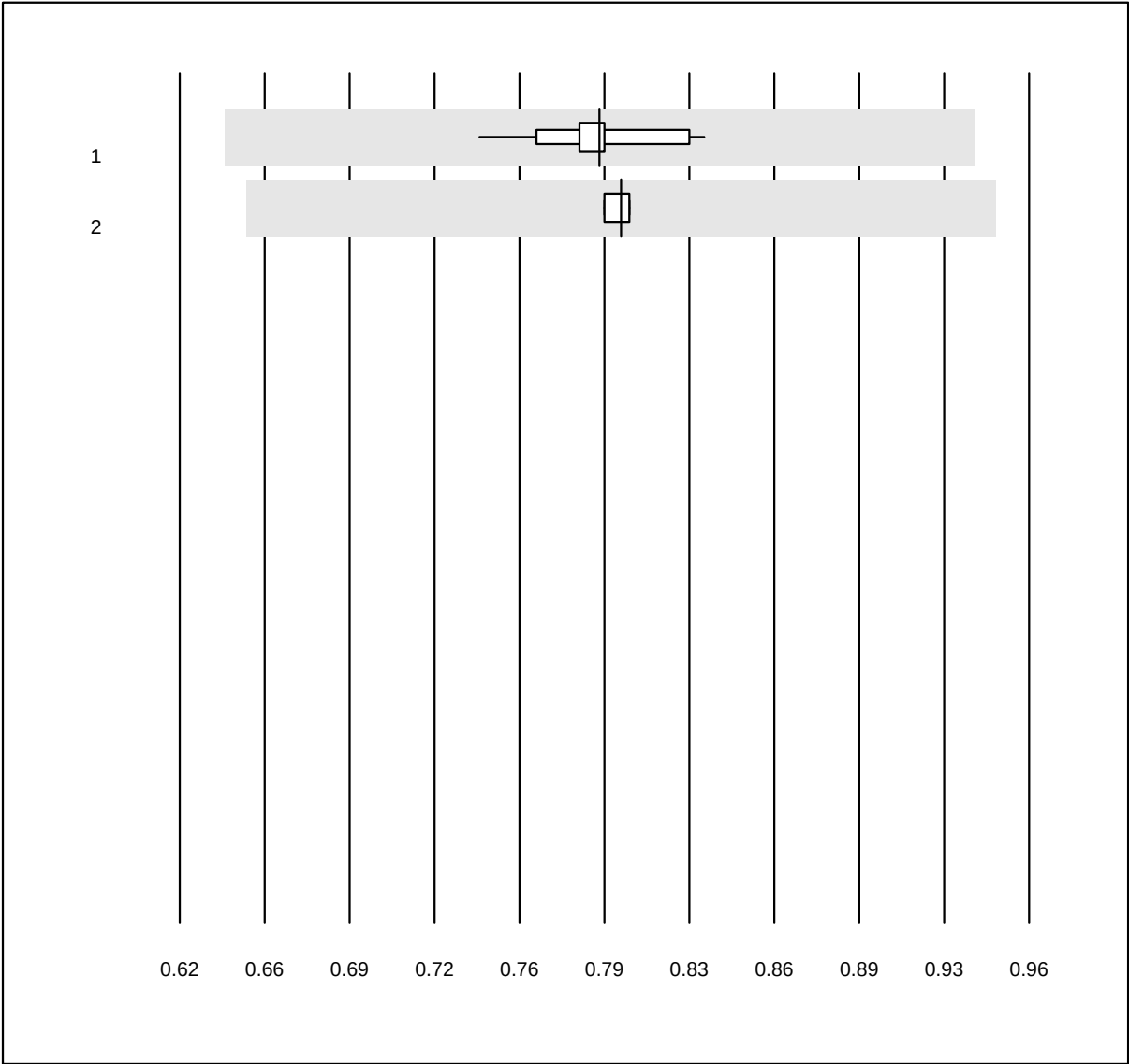


QUALAB Toleranz: 15%
(< 1.0: +/- 0.15 mmol/l)

Litio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	15	100.0	0.0	0.0	0.79	2.5	e
2 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	0.80	0.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Magnesio

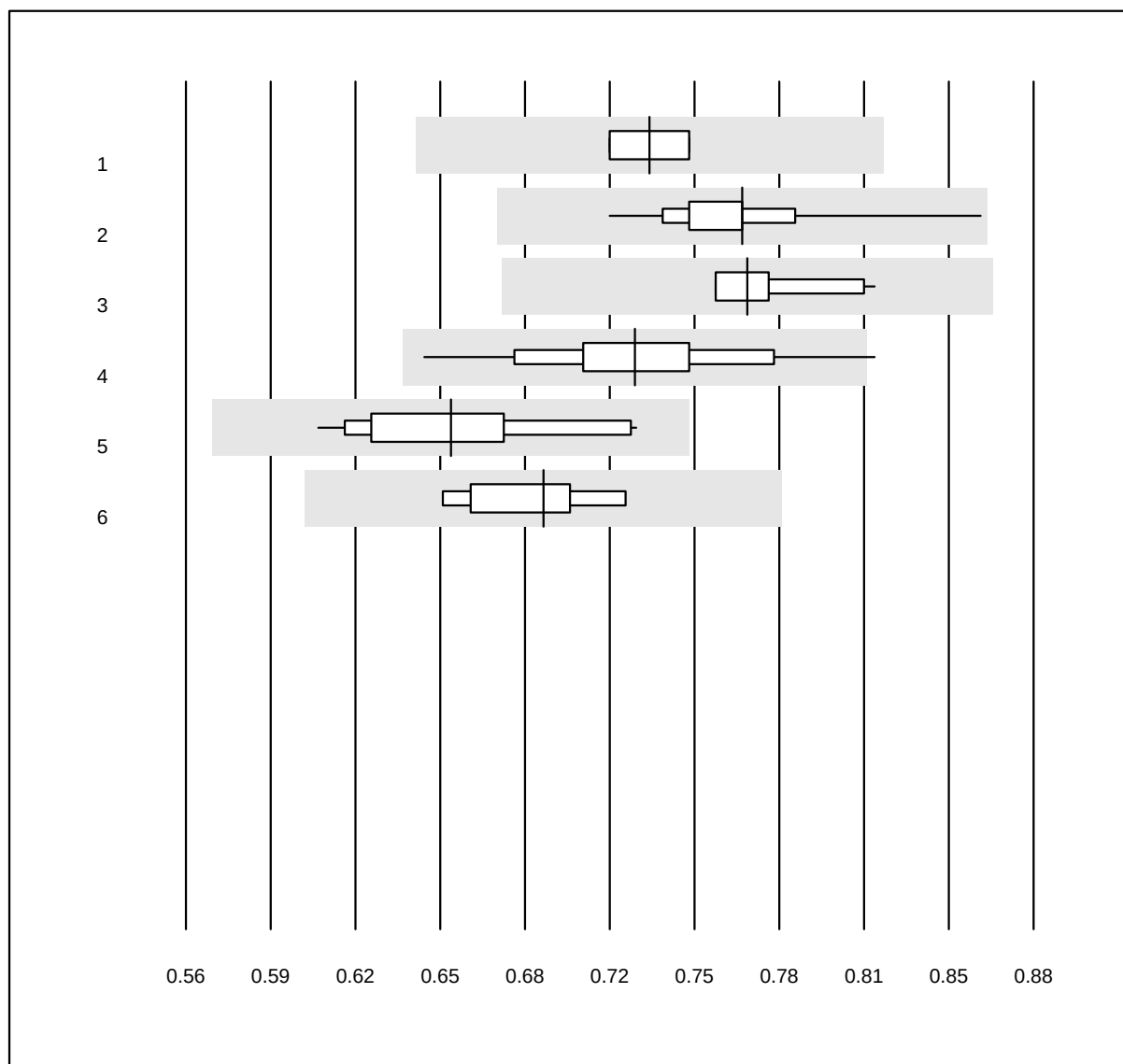


QUALAB Toleranz: 12%

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0.73	1.9	e
2 Roche	40	100.0	0.0	0.0	0.77	3.0	a
3 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	0.77	2.3	e
4 Fuji Dri-Chem	44	93.2	4.5	2.3	0.73	4.8	e
5 Spotchem D-Concept	22	95.5	0.0	4.5	0.66	5.6	e
6 Vitros	6	100.0	0.0	0.0	0.69	3.2	e

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sodio 1

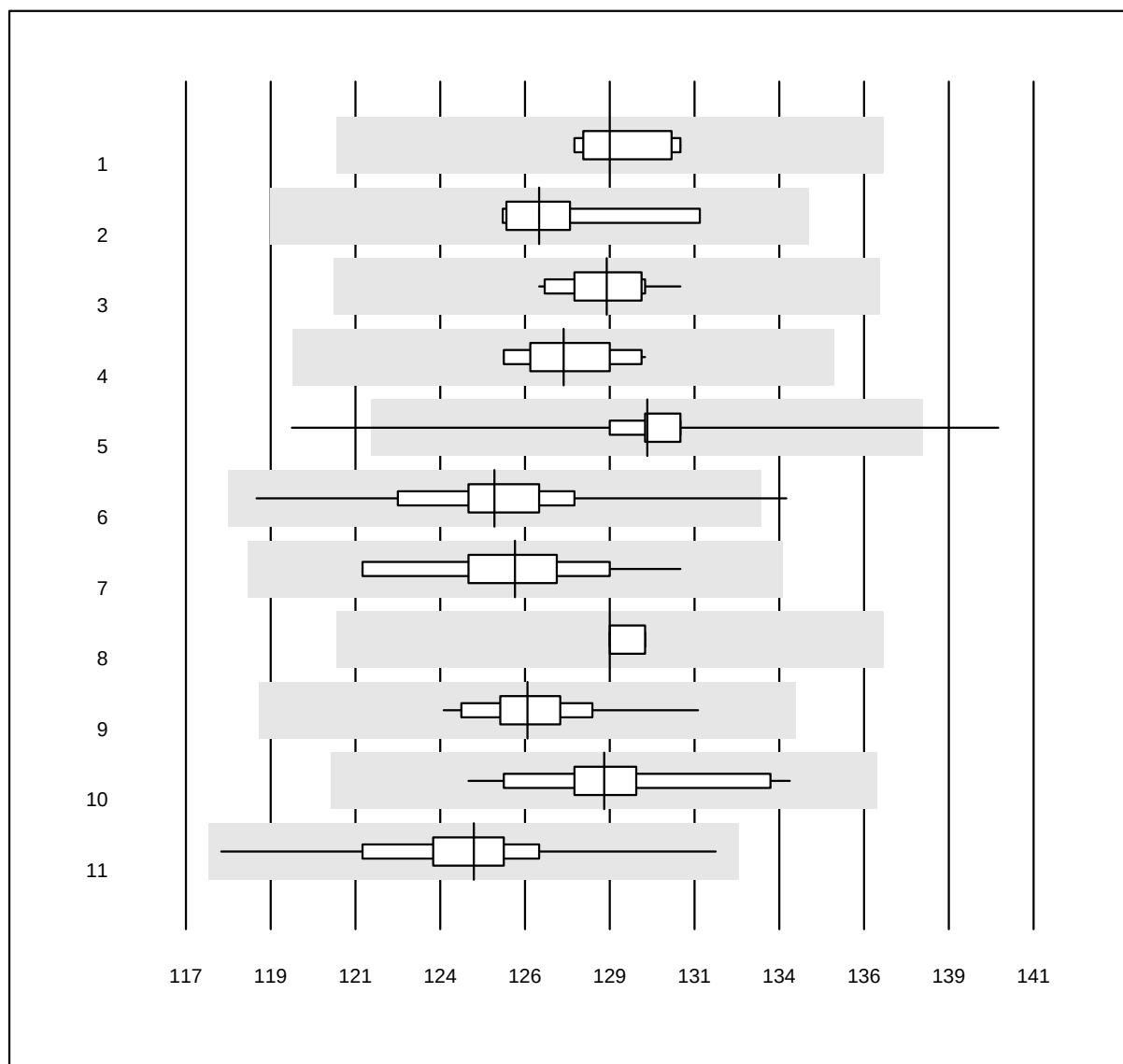


QUALAB Toleranz: 6%

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	129	0.9	e
2 Beckman	6	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
3 Roche	47	100.0	0.0	0.0	129	0.8	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	128	1.0	e
5 Fuji Dri-Chem	1055	99.0	0.4	0.7	130	1.1	e
6 Spotchem D-Concept	447	99.3	0.2	0.4	126	1.5	e
7 Piccolo	37	100.0	0.0	0.0	126	1.8	e
8 iStat Chem8	10	100.0	0.0	0.0	129	0.4	e
9 Exias	110	98.2	0.0	1.8	127	1.2	e
10 i-Smart 30 PRO	14	100.0	0.0	0.0	129	1.9	e
11 Spotchem EL-SE 1520	49	95.9	0.0	4.1	125	1.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sodio 2

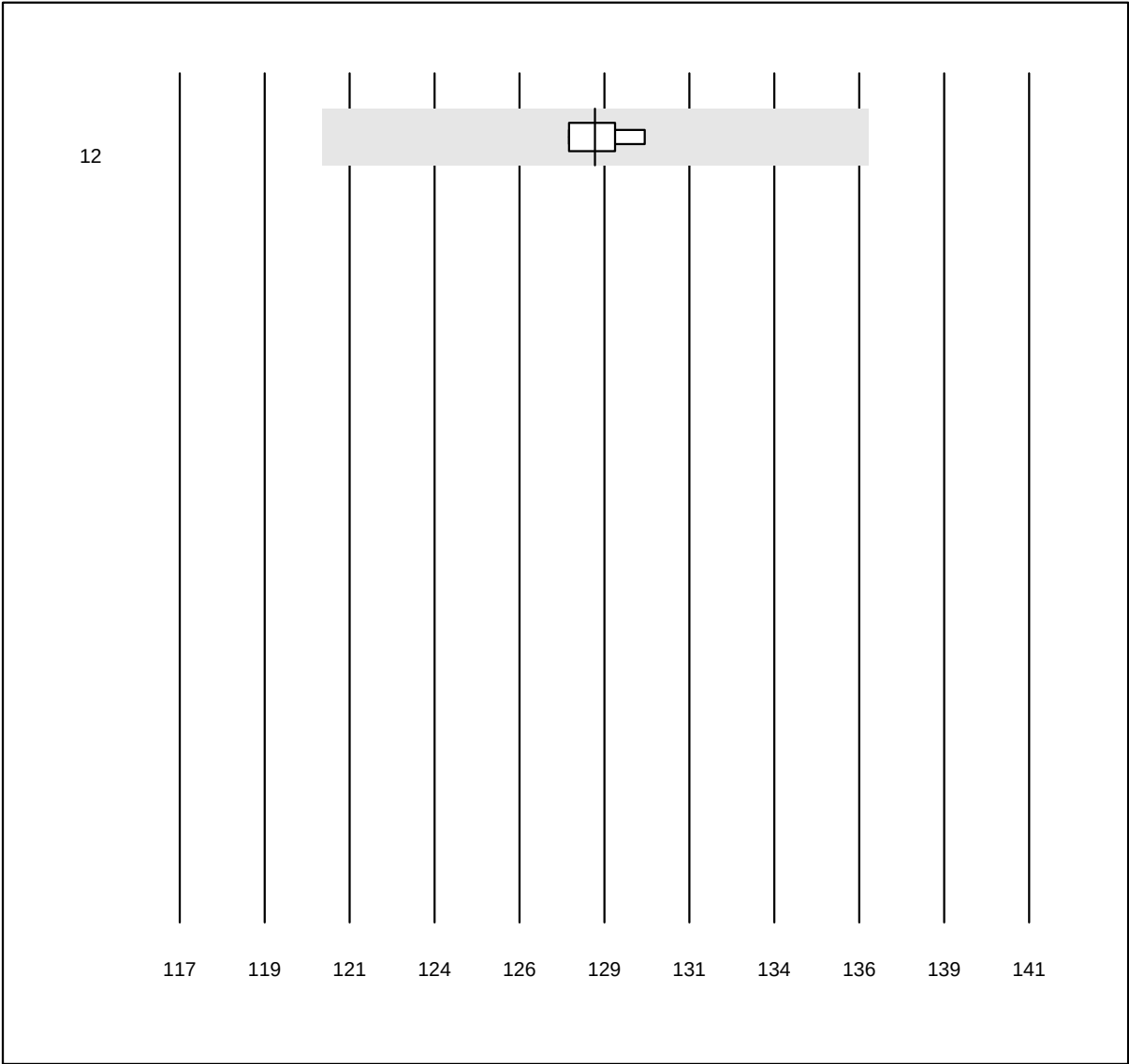


QUALAB Toleranz: 6%

Sodio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	129	0.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Amilasi pancreatica

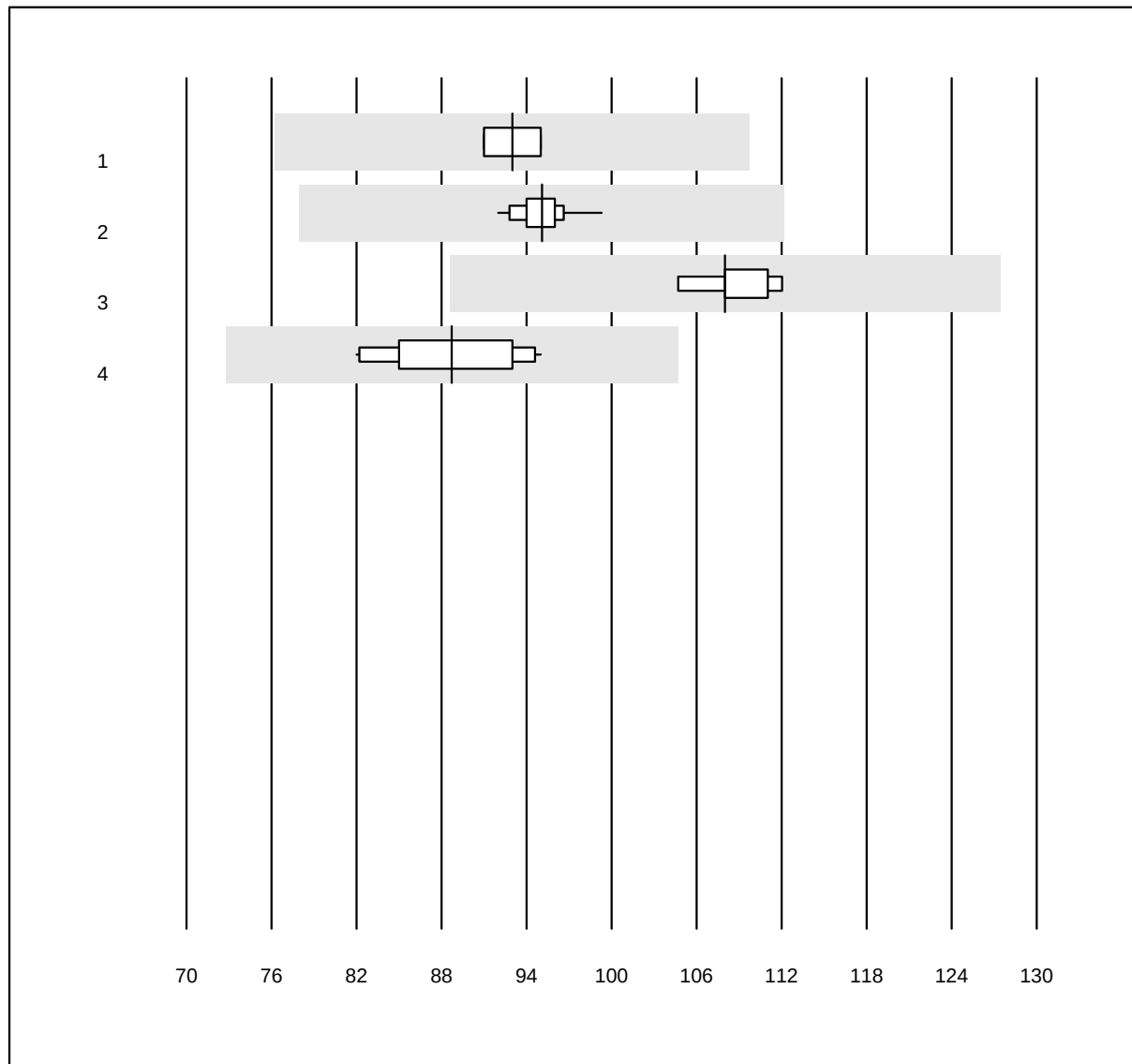


QUALAB Toleranz: 18%

Amilasi pancreatica (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	93	2.0	e
2 Roche	27	100.0	0.0	0.0	95	1.6	e
3 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	108	2.1	e
4 Autolyser	11	100.0	0.0	0.0	89	4.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Fosfati

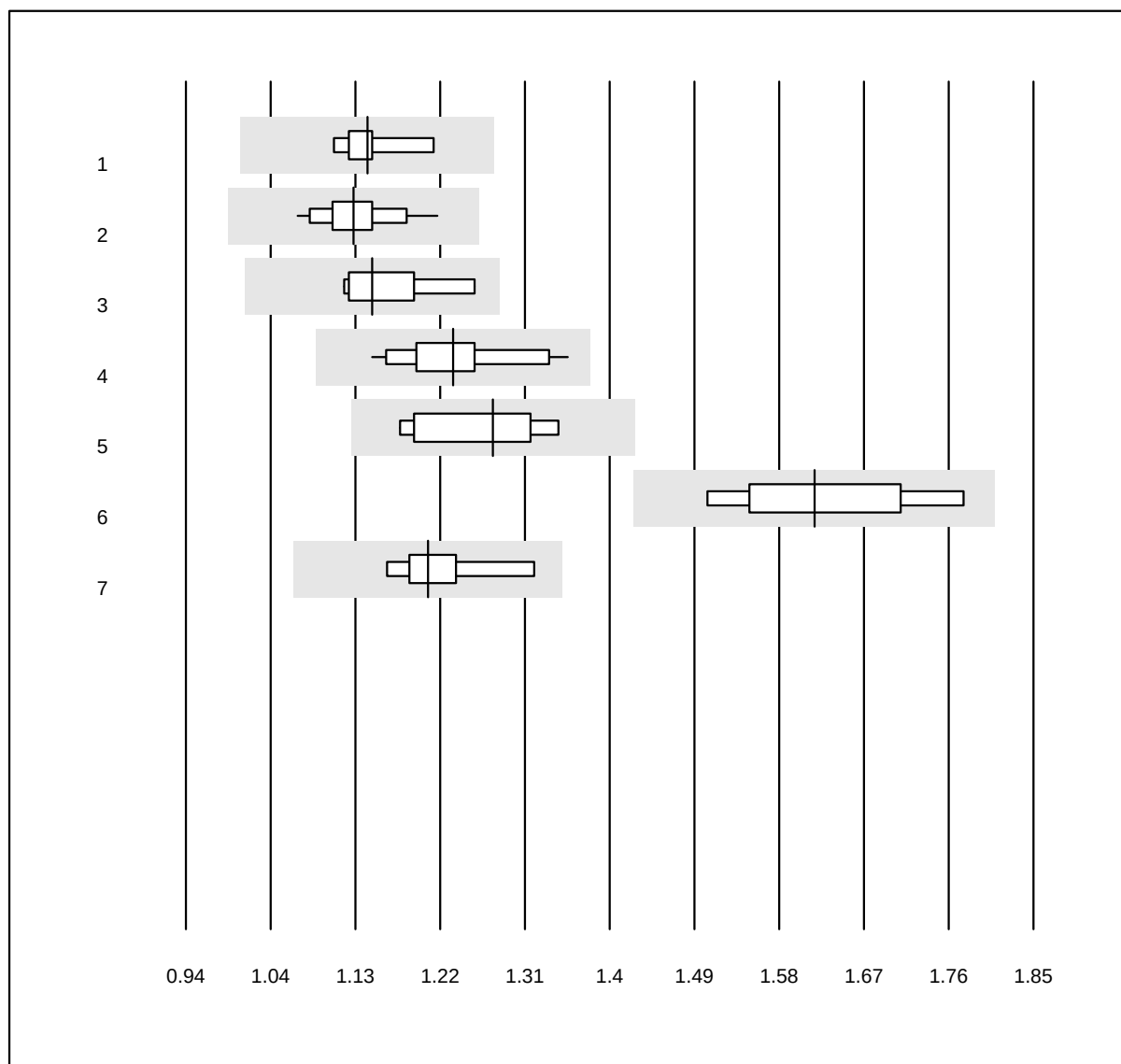


QUALAB Toleranz: 12%

Fosfati (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.1	2.6	e
2 Roche	42	100.0	0.0	0.0	1.1	3.2	e
3 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	1.1	4.0	e
4 Fuji Dri-Chem	56	96.4	0.0	3.6	1.2	4.8	e
5 Spotchem D-Concept	10	90.0	0.0	10.0	1.3	5.0	e*
6 Piccolo	4	100.0	0.0	0.0	1.6	5.2	e*
7 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	1.2	3.8	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Proteine totali 1

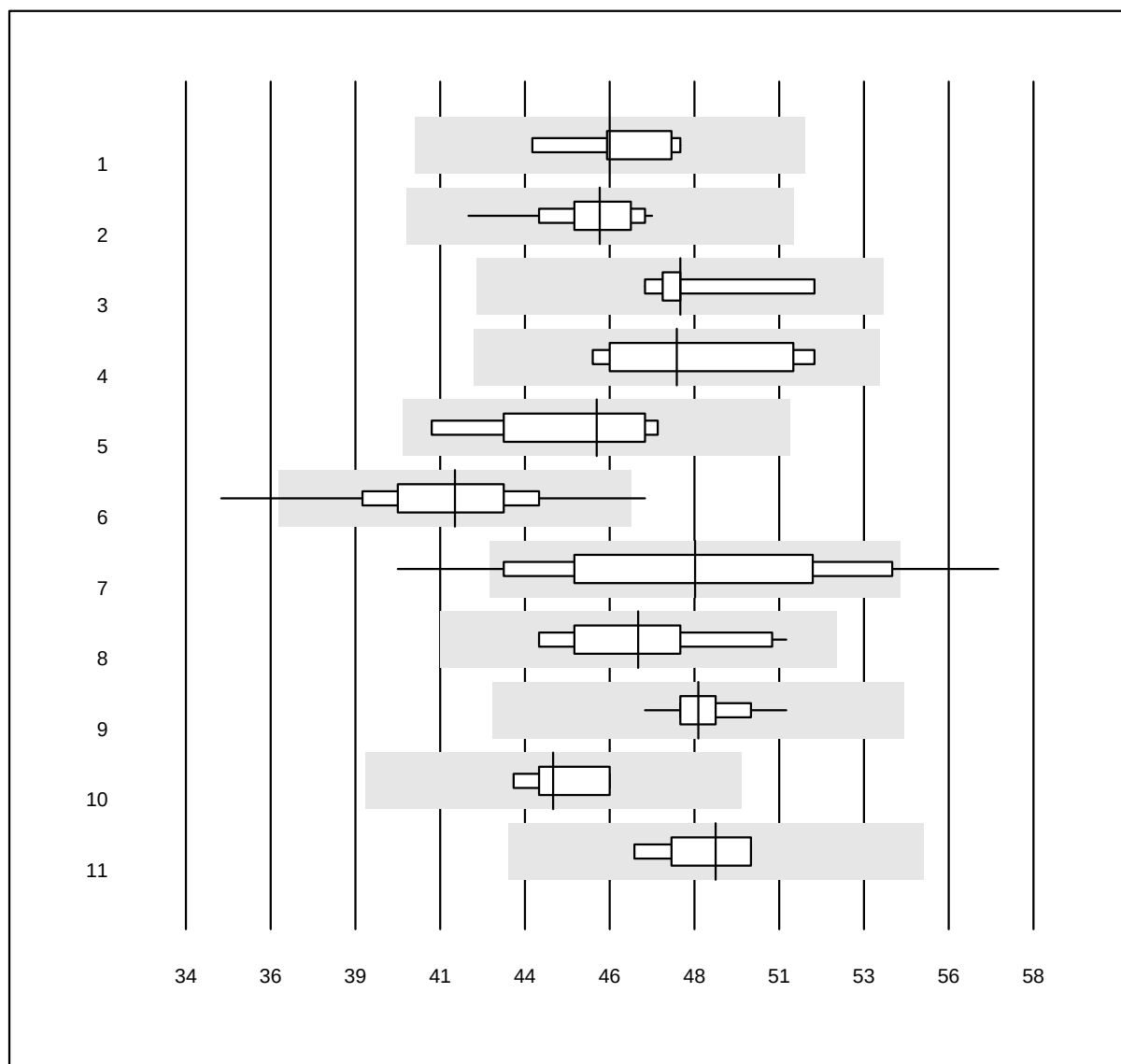


QUALAB Tolleranz: 12%

Proteine totali (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	46.0	2.8	e
2 Roche	43	100.0	0.0	0.0	45.7	2.5	e
3 Siemens	10	90.0	0.0	10.0	48.0	2.9	e
4 Autolyser	7	100.0	0.0	0.0	47.9	5.2	e*
5 Selectra Pro	7	100.0	0.0	0.0	45.6	4.9	e*
6 Fuji Dri-Chem	183	98.4	1.1	0.5	41.6	4.5	e
7 Spotchem D-Concept	212	84.0	14.2	1.9	48.4	8.1	e
8 Spotchem SP-4430	23	100.0	0.0	0.0	46.8	4.6	e
9 Piccolo	50	100.0	0.0	0.0	48.5	1.8	e
10 Vitros	7	100.0	0.0	0.0	44.4	2.3	e
11 Skyla	6	100.0	0.0	0.0	49.0	2.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Proteine totali 2

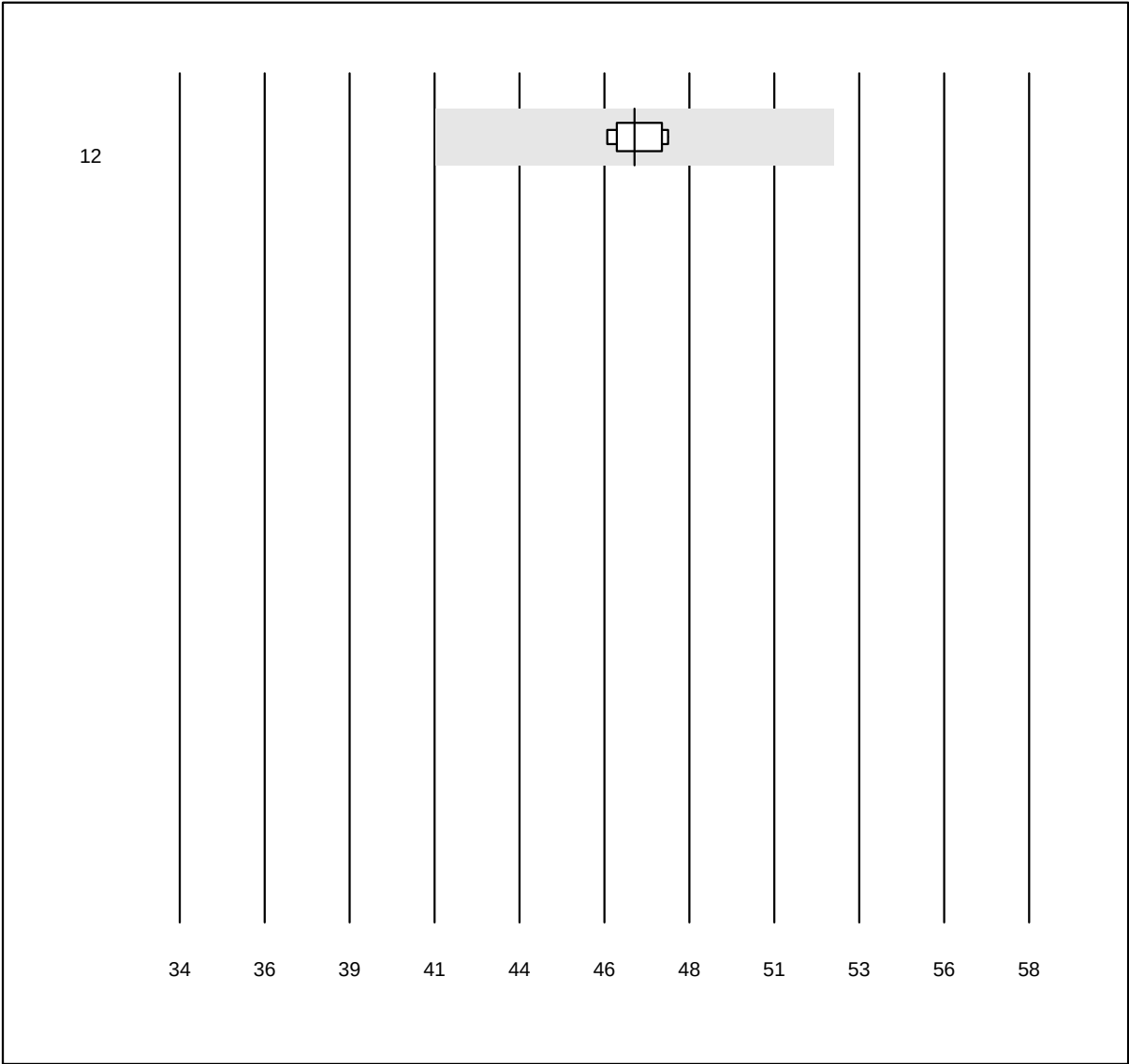


QUALAB Toleranz: 12%

Proteine totali (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Seamaty	8	100.0	0.0	0.0	46.9	1.4	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Trigliceridi 1

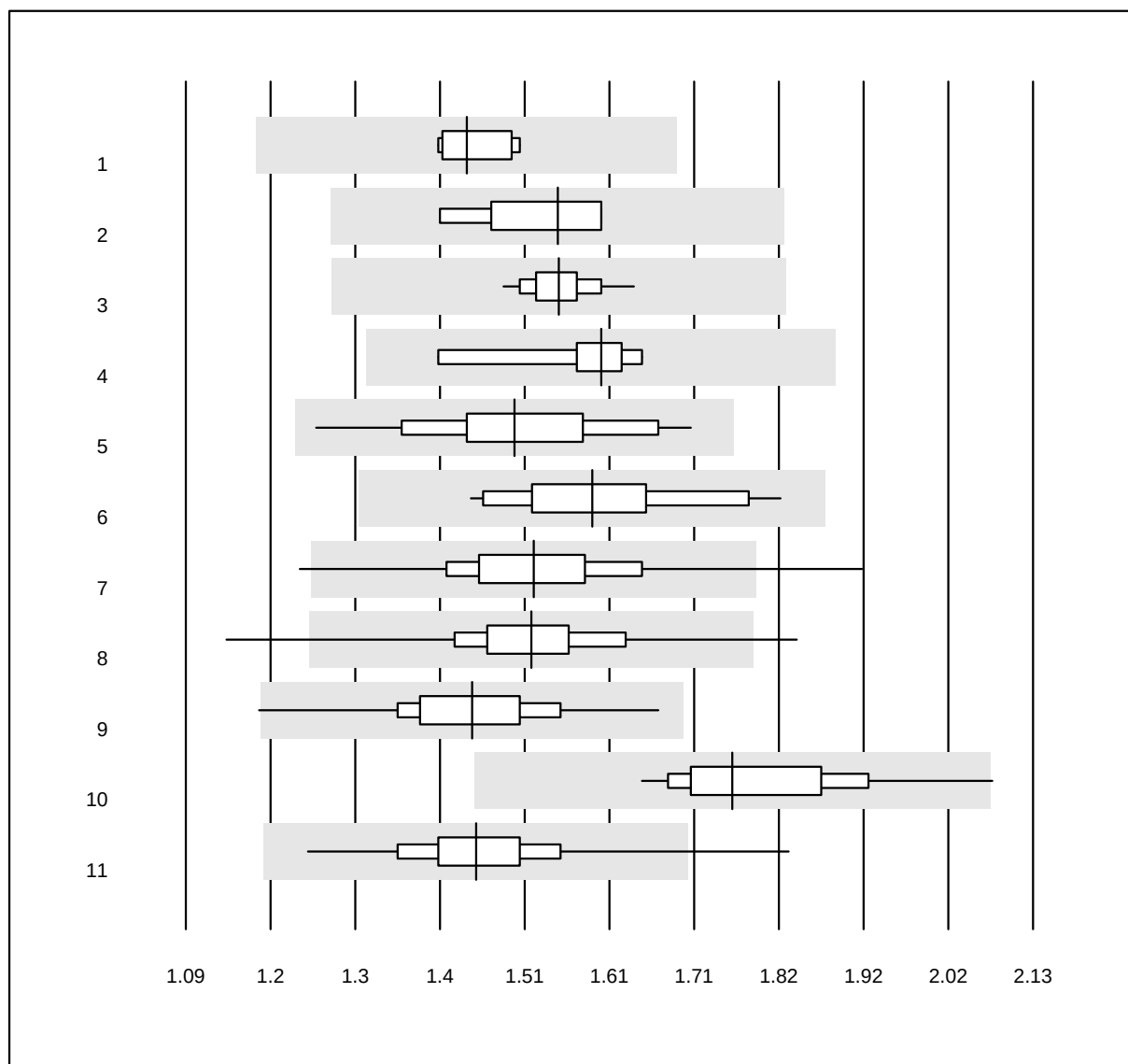


QUALAB Toleranz: 18%

Trigliceridi (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	1.44	2.8	e
2 Beckman	5	100.0	0.0	0.0	1.55	4.7	e
3 Roche	39	100.0	0.0	0.0	1.55	2.6	e
4 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	1.60	4.6	e
5 Autolyser	24	100.0	0.0	0.0	1.49	7.3	e
6 Selectra Pro	12	100.0	0.0	0.0	1.59	6.3	e
7 Fuji Dri-Chem	994	97.0	1.9	1.1	1.52	6.3	e
8 Spotchem D-Concept	490	97.1	0.8	2.0	1.51	5.6	e
9 Spotchem SP-4430	70	98.6	1.4	0.0	1.44	5.9	e
10 Piccolo	18	88.9	5.6	5.6	1.76	6.0	e
11 Cholestech LDX	199	98.5	1.5	0.0	1.45	5.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Trigliceridi 2

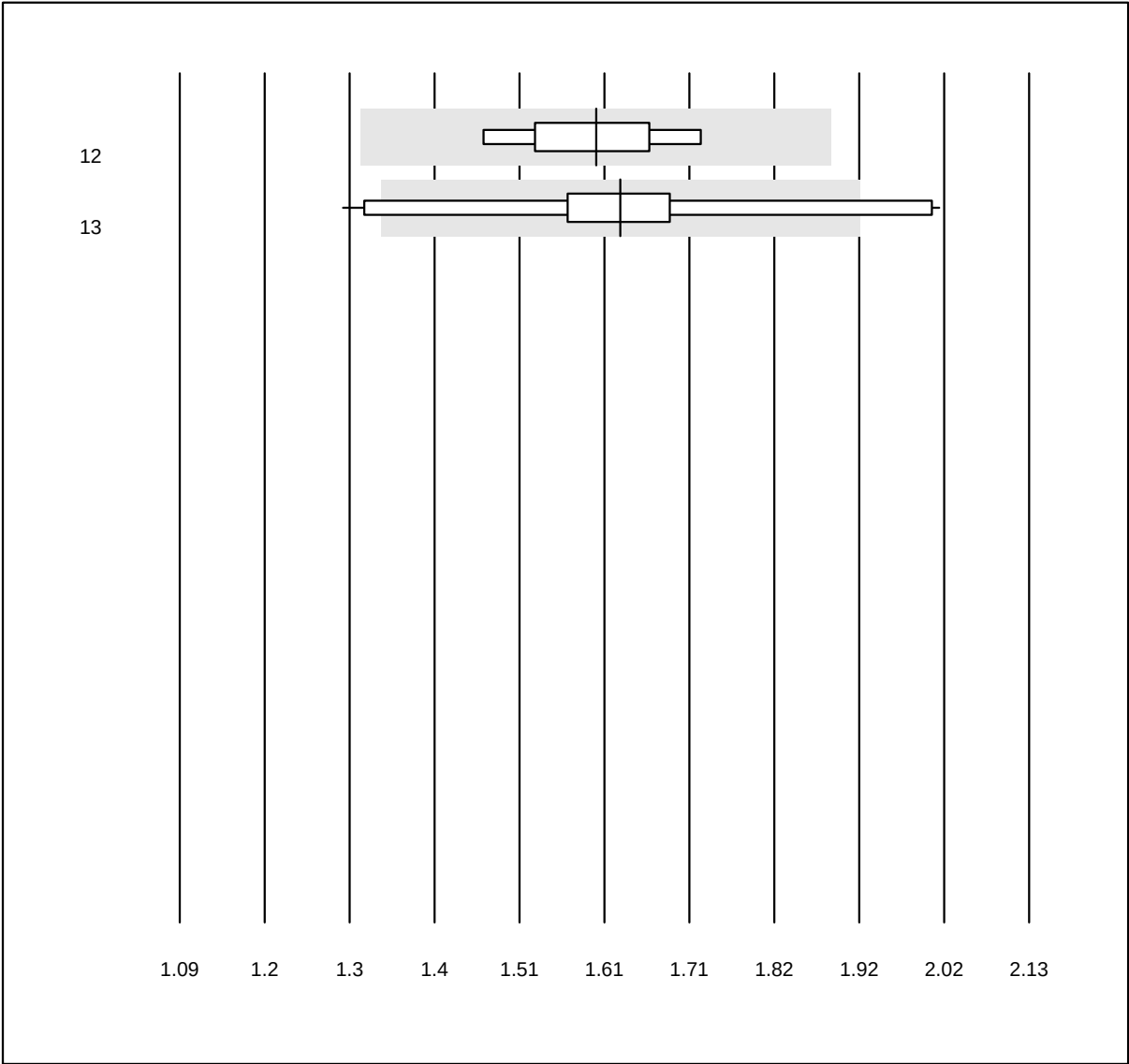


QUALAB Toleranz: 18%

Trigliceridi (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	1.60	4.9	e*
13 Seamaty	11	63.6	27.3	9.1	1.63	12.5	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HbA1c campione A 1

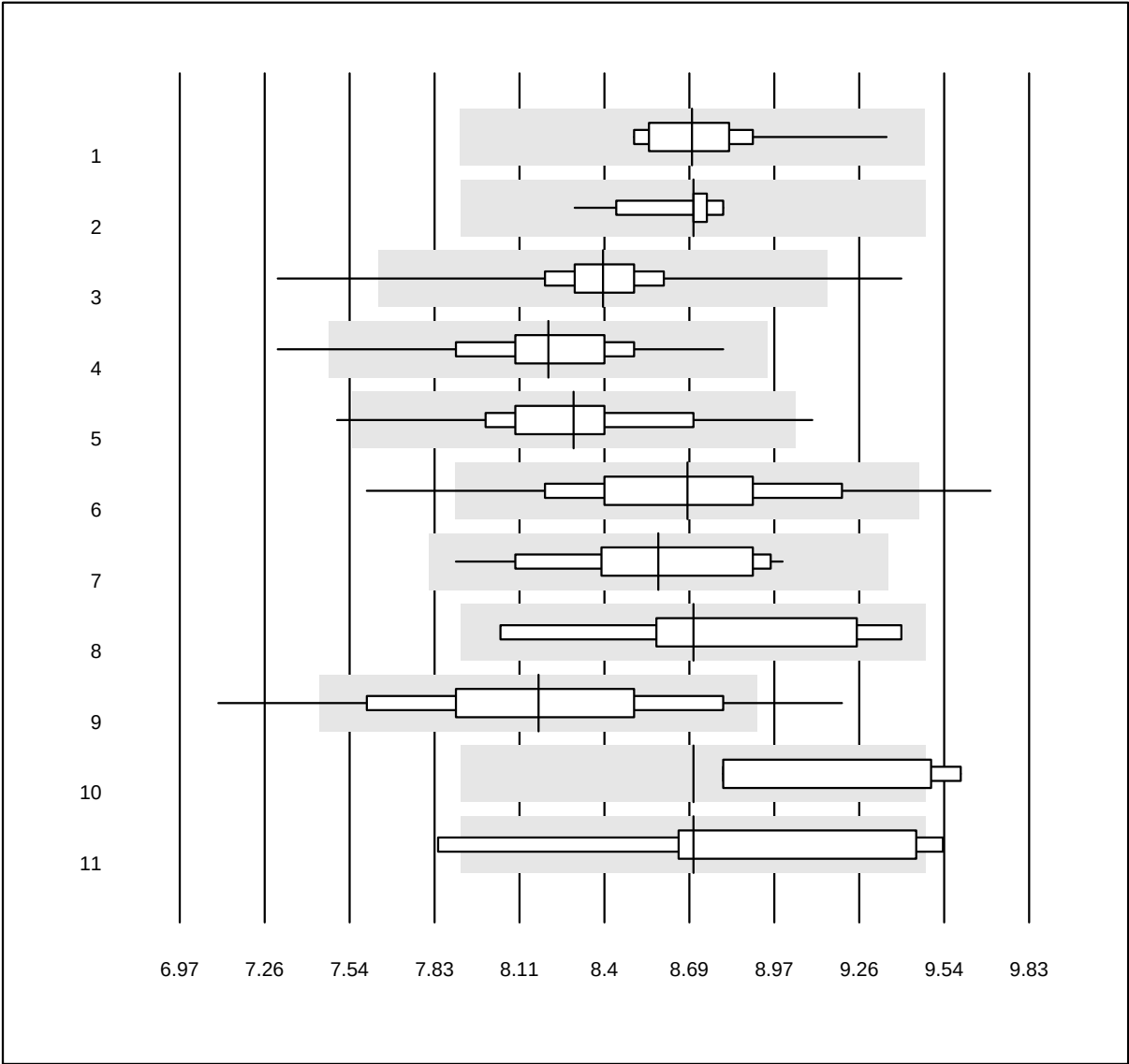


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	26	96.2	0.0	3.8	8.7	2.2	e
2 HPLC	16	100.0	0.0	0.0	8.7	1.4	e
3 Afinion	624	98.4	0.5	1.1	8.4	2.2	e
4 Cobas b101/Click	258	98.4	0.8	0.8	8.2	2.9	e
5 DCA Vantage	156	96.2	1.3	2.6	8.3	3.0	e
6 AFIAS	162	91.4	5.6	3.1	8.7	4.6	e
7 Celltac chemi	43	100.0	0.0	0.0	8.6	3.9	e
8 LumiraDx	4	100.0	0.0	0.0	8.7	4.4	c*
9 A1c Now	202	84.7	8.9	6.4	8.2	5.5	e
10 Quick Read go	9	77.8	22.2	0.0	8.7	3.7	c*
11 Eurolyser	6	66.7	16.7	16.7	8.7	5.8	c*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HbA1c campione A 2

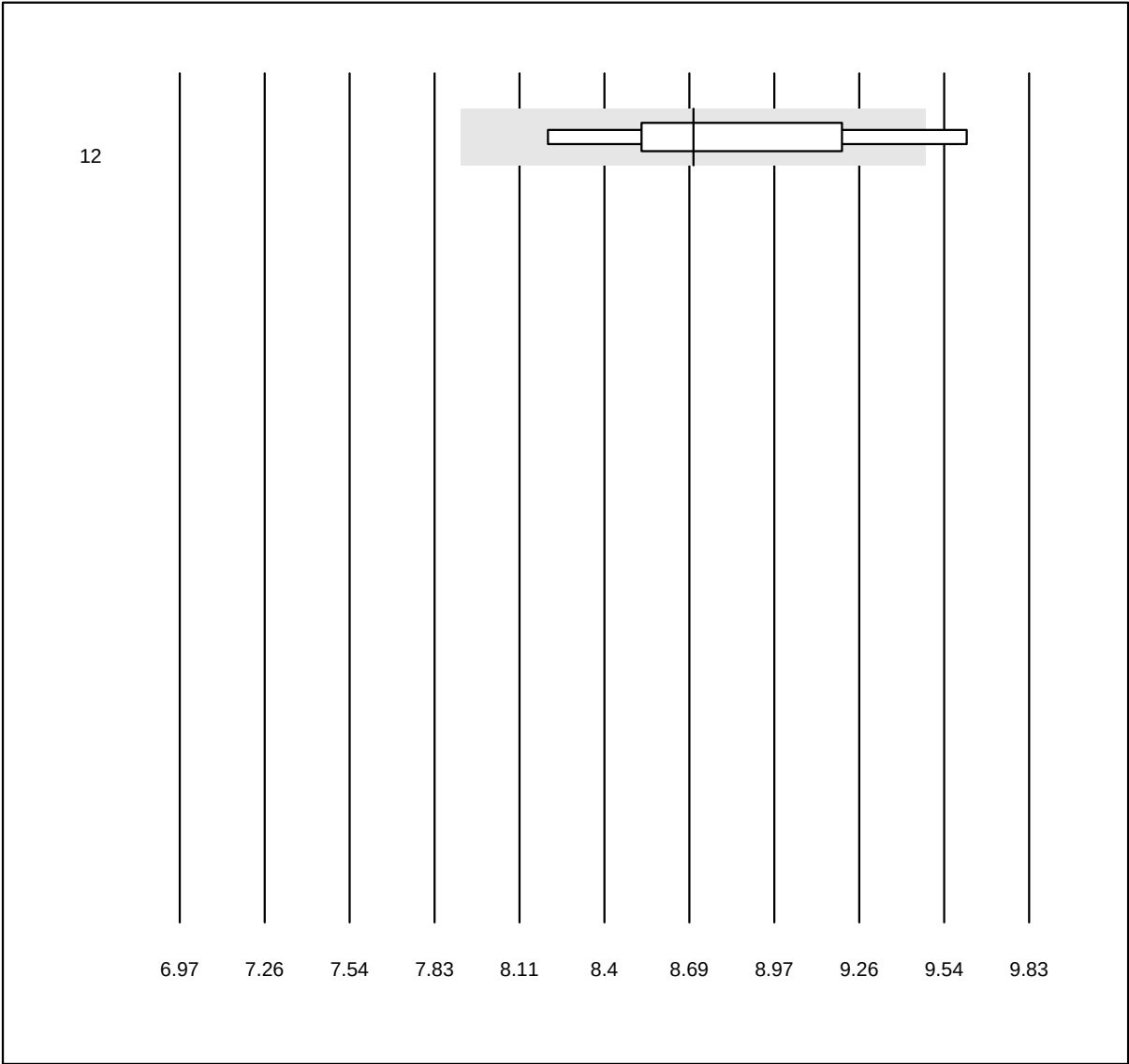


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c campione A (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
12 Altri	6	83.3	16.7	0.0	8.7	4.9	c*

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HbA1c campione B

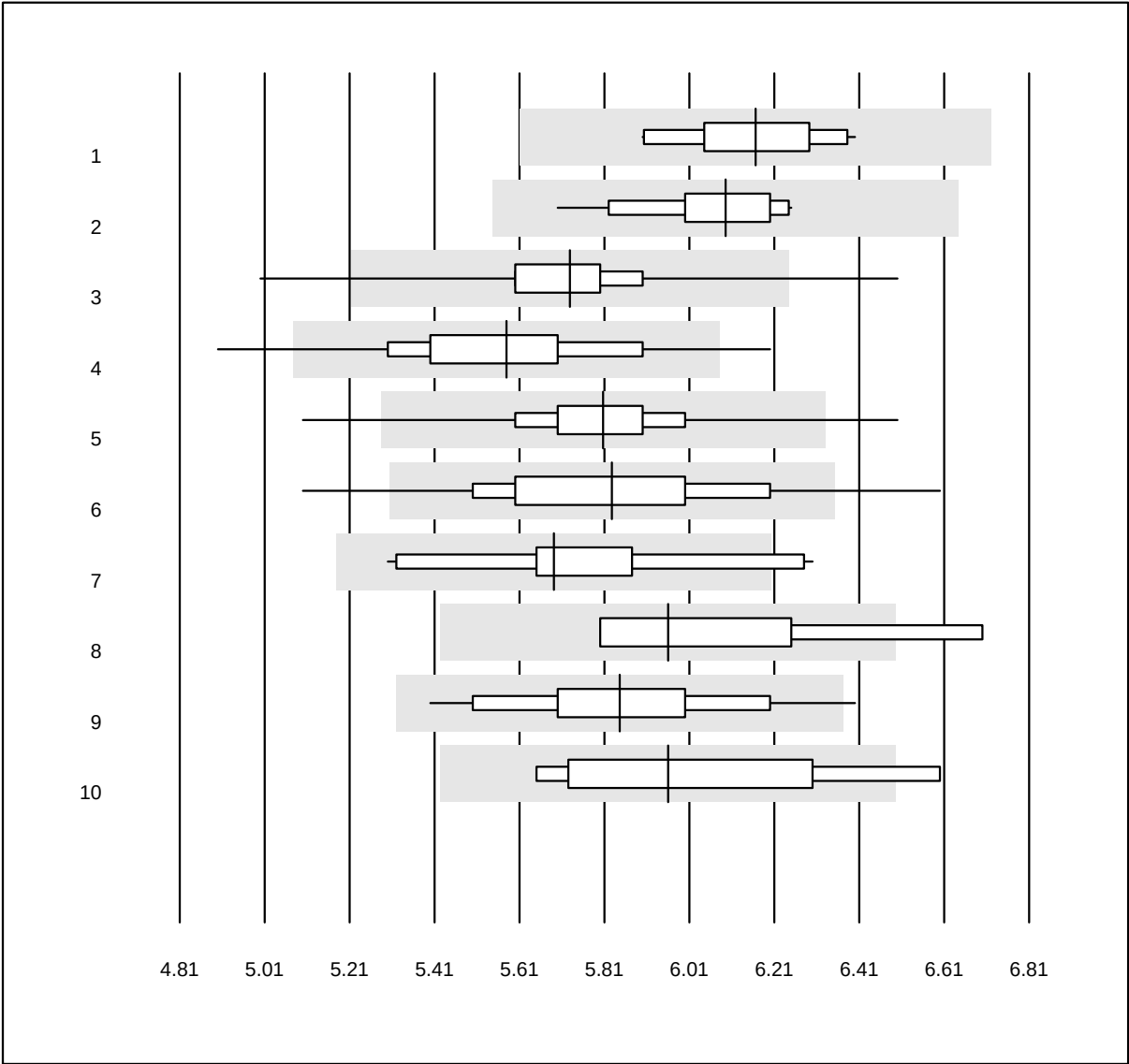


QUALAB Toleranz: 9%

HbA1c campione B (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	23	95.7	0.0	4.3	6.2	2.5	e
2 HPLC	15	100.0	0.0	0.0	6.1	2.3	e
3 Afinion	661	98.3	0.6	1.1	5.7	2.4	e
4 Cobas b101/Click	223	97.3	2.7	0.0	5.6	3.9	e
5 DCA Vantage	169	97.0	2.4	0.6	5.8	3.2	e
6 AFIAS	242	90.1	9.1	0.8	5.8	5.1	e
7 A1c Now	13	69.2	7.7	23.1	5.7	4.8	e*
8 Quick Read go	5	80.0	20.0	0.0	6.0	4.9	c*
9 Celltac chemi	35	94.3	2.9	2.9	5.8	4.0	e
10 Altri	4	100.0	0.0	0.0	6.0	5.2	c*

7 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

pO2

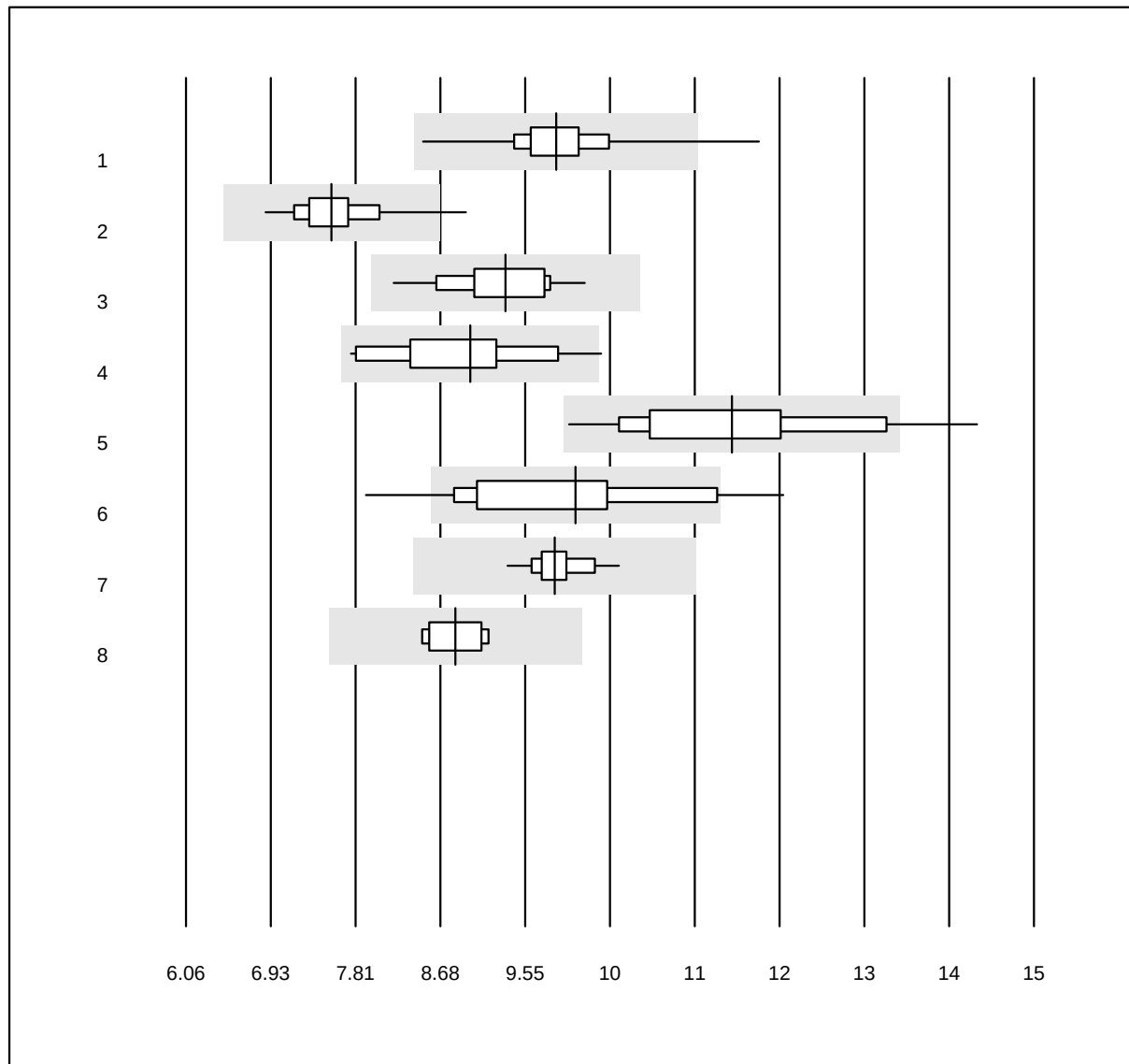


QUALAB Toleranz: 15%

pO2 (kPa)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	122	93.4	2.5	4.1	9.96	5.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	176	92.6	2.3	5.1	7.59	5.0	e
3 GEM	20	95.0	0.0	5.0	9.43	5.3	e
4 Cobas b 123	18	88.9	5.6	5.6	9.06	7.6	e
5 iStat	57	84.2	8.8	7.0	11.82	8.9	e
6 EPOC	61	80.3	8.2	11.5	10.17	10.0	e
7 RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	9.95	2.6	e
8 IL	4	100.0	0.0	0.0	8.90	3.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

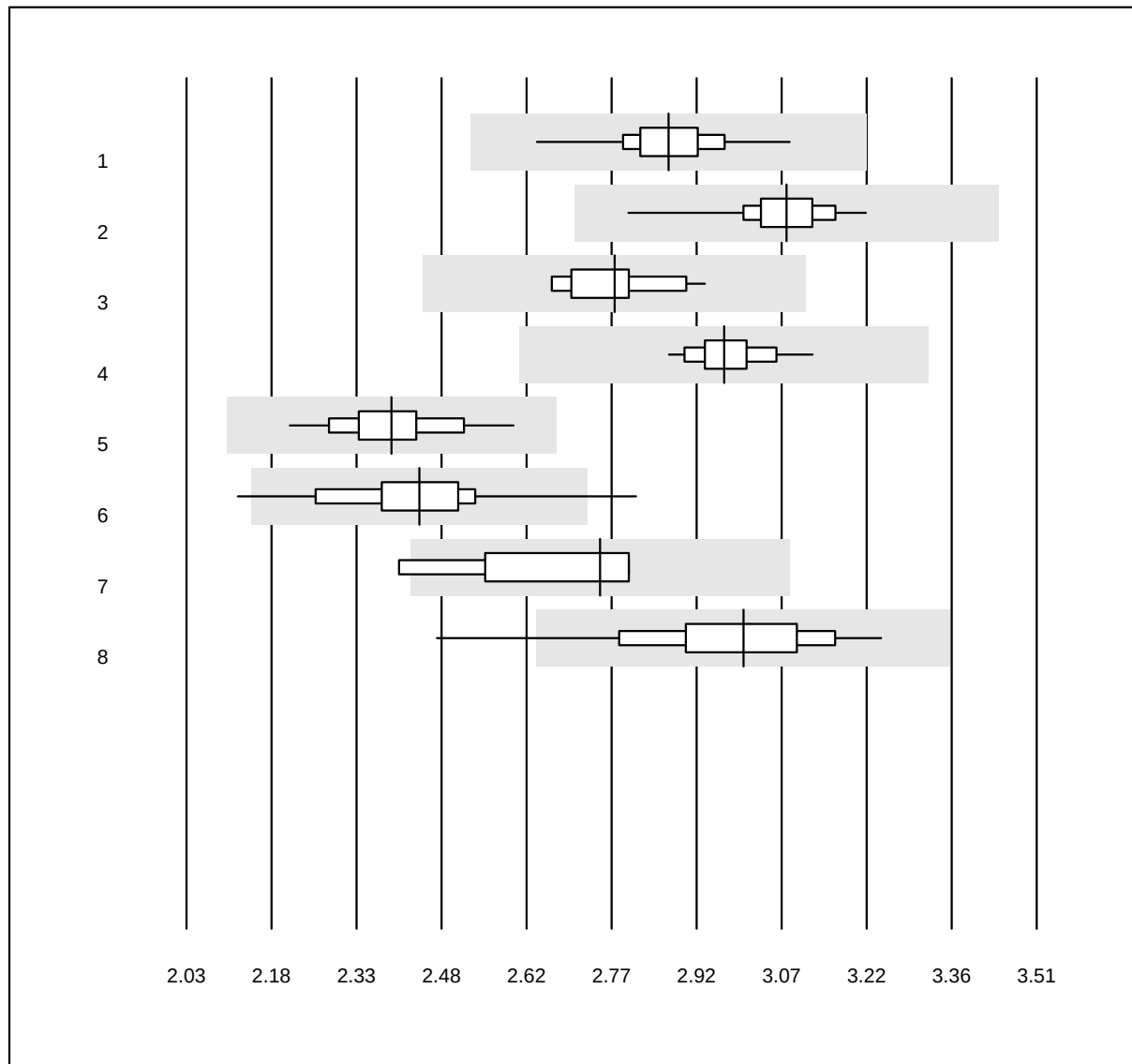pCO₂


QUALAB Toleranz: 12%

pCO₂ (kPa)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	122	100.0	0.0	0.0	2.87	2.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	175	99.4	0.0	0.6	3.07	2.2	e
3 GEM	20	100.0	0.0	0.0	2.78	2.9	e
4 Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	2.97	2.1	e
5 iStat	59	98.3	0.0	1.7	2.39	3.6	e
6 EPOC	61	90.2	3.3	6.6	2.44	5.2	e
7 IL	4	100.0	0.0	0.0	2.75	5.2	e*
8 RAPIDPoint 500	30	96.7	3.3	0.0	3.00	5.2	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

pH

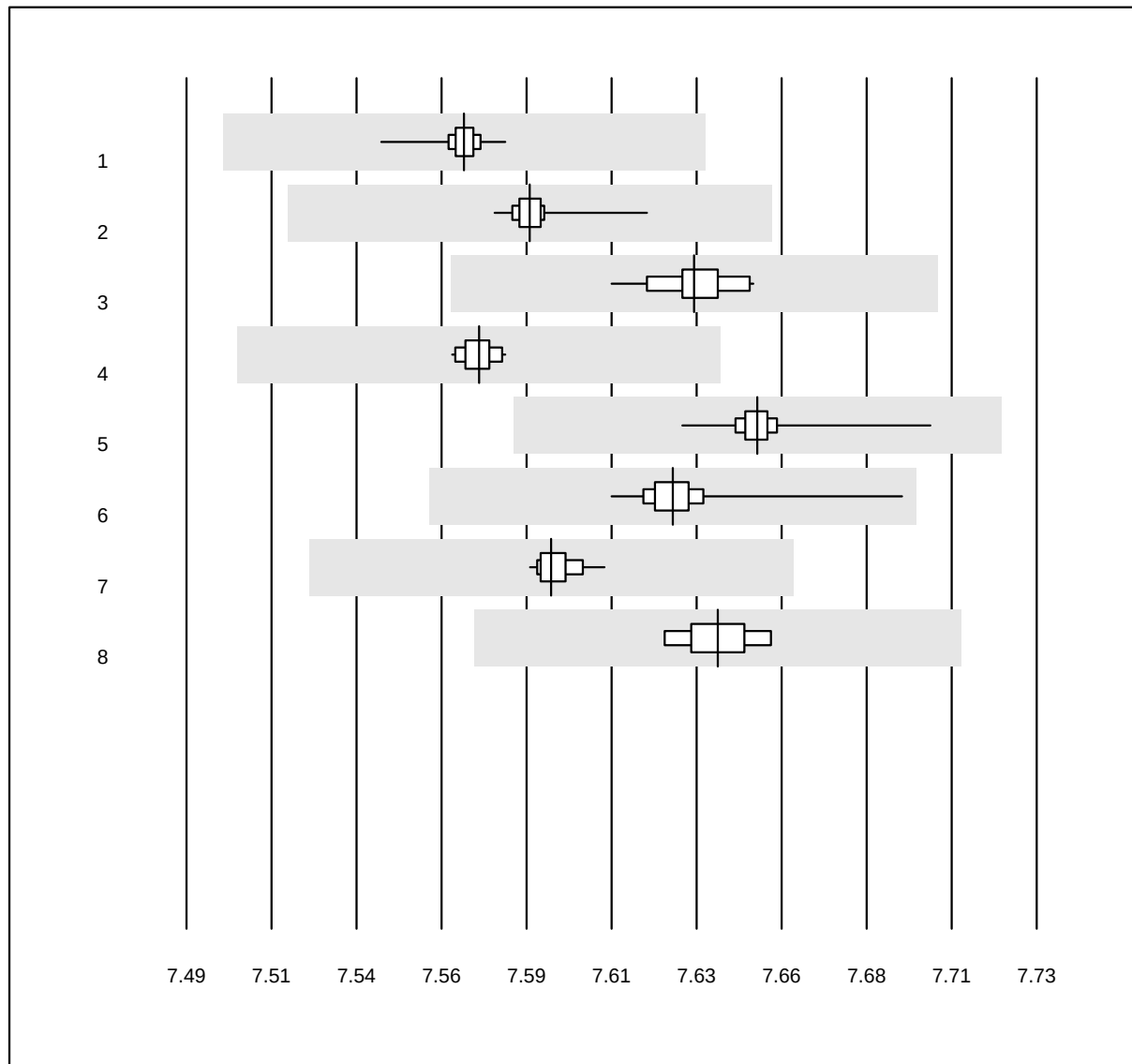


QUALAB Toleranz: 0%

pH ()

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	121	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	177	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
3 GEM	20	100.0	0.0	0.0	7.63	0.1	e
4 Cobas b 123	18	100.0	0.0	0.0	7.57	0.1	e
5 iStat	62	100.0	0.0	0.0	7.65	0.1	e
6 EPOC	61	98.4	0.0	1.6	7.63	0.1	e
7 RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	7.59	0.1	e
8 IL	4	100.0	0.0	0.0	7.64	0.1	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Emoglobina BG

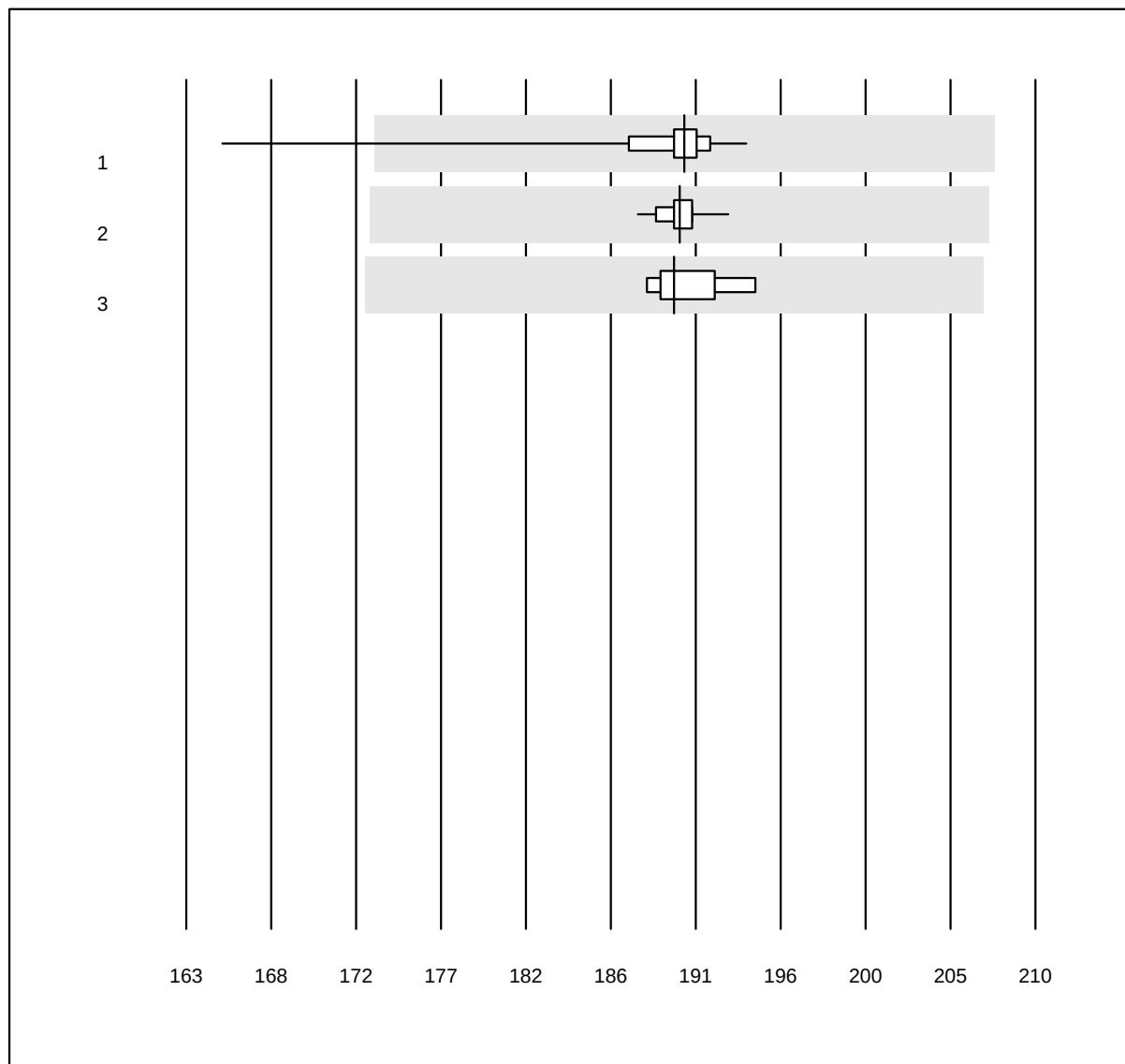


QUALAB Toleranz: 9%

Emoglobina BG (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	115	98.3	0.9	0.9	190.6	2.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	162	99.4	0.0	0.6	190.3	0.5	e
3 ABL80 FLEX CO-OX / OSM	4	100.0	0.0	0.0	190.0	0.9	e

Bilirubina OR

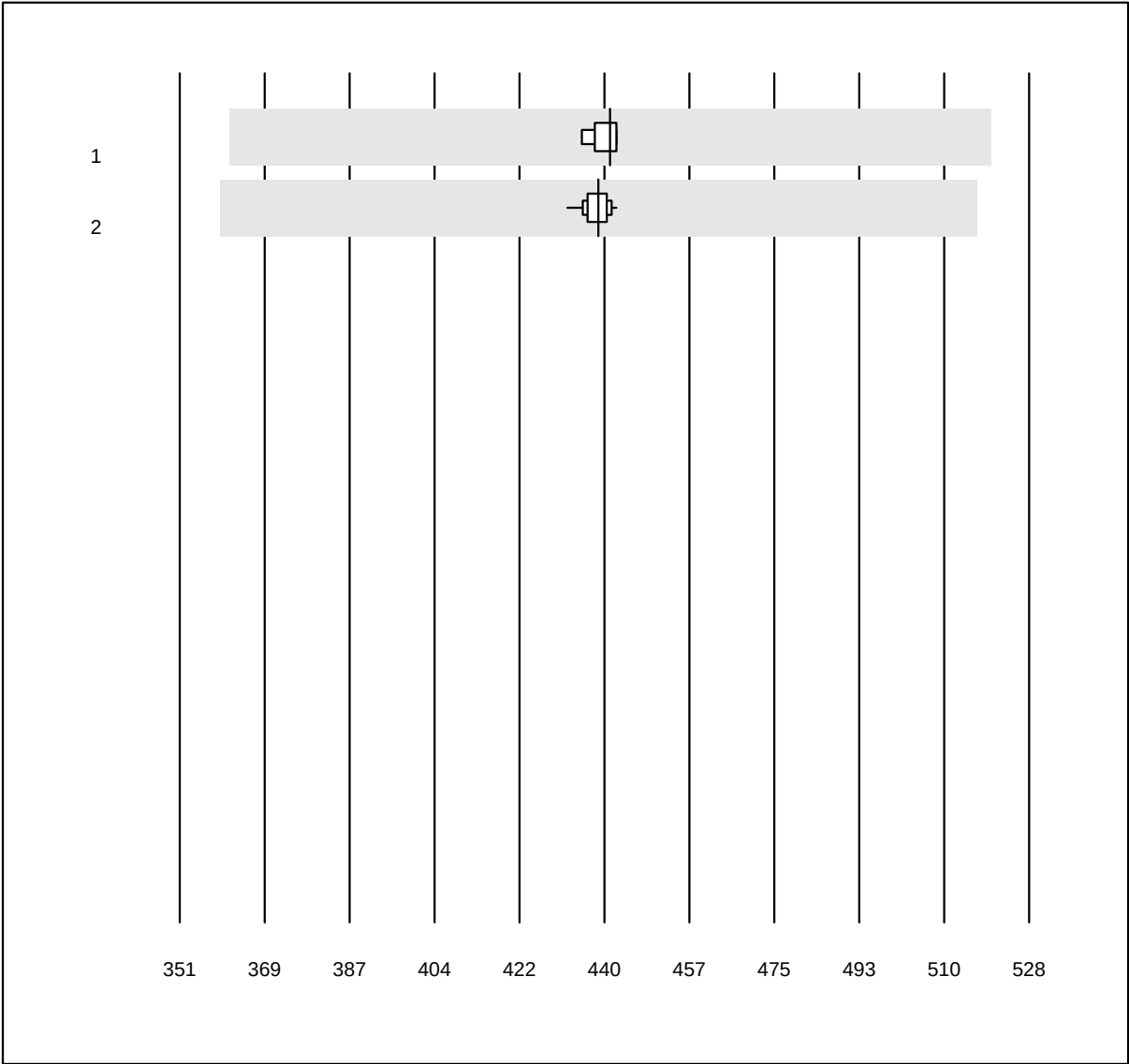


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubina OR (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	5	100.0	0.0	0.0	440.7	0.6	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	35	100.0	0.0	0.0	438.2	0.5	e

FO2Hb OR

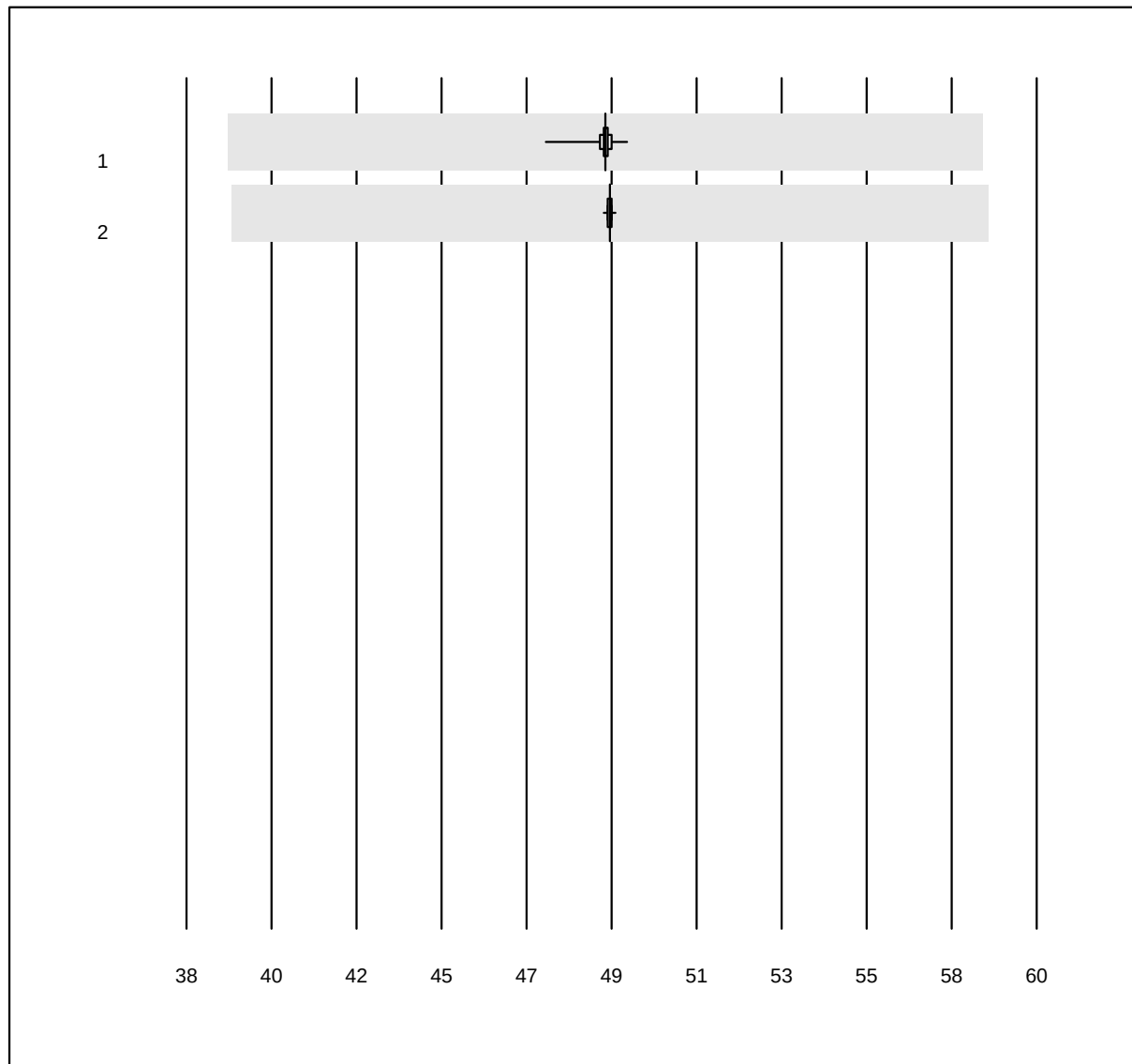


MQ Toleranz: 20%

FO2Hb OR (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	101	99.0	0.0	1.0	48.840	0.4	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	151	99.3	0.0	0.7	48.956	0.1	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

FCOHb OR

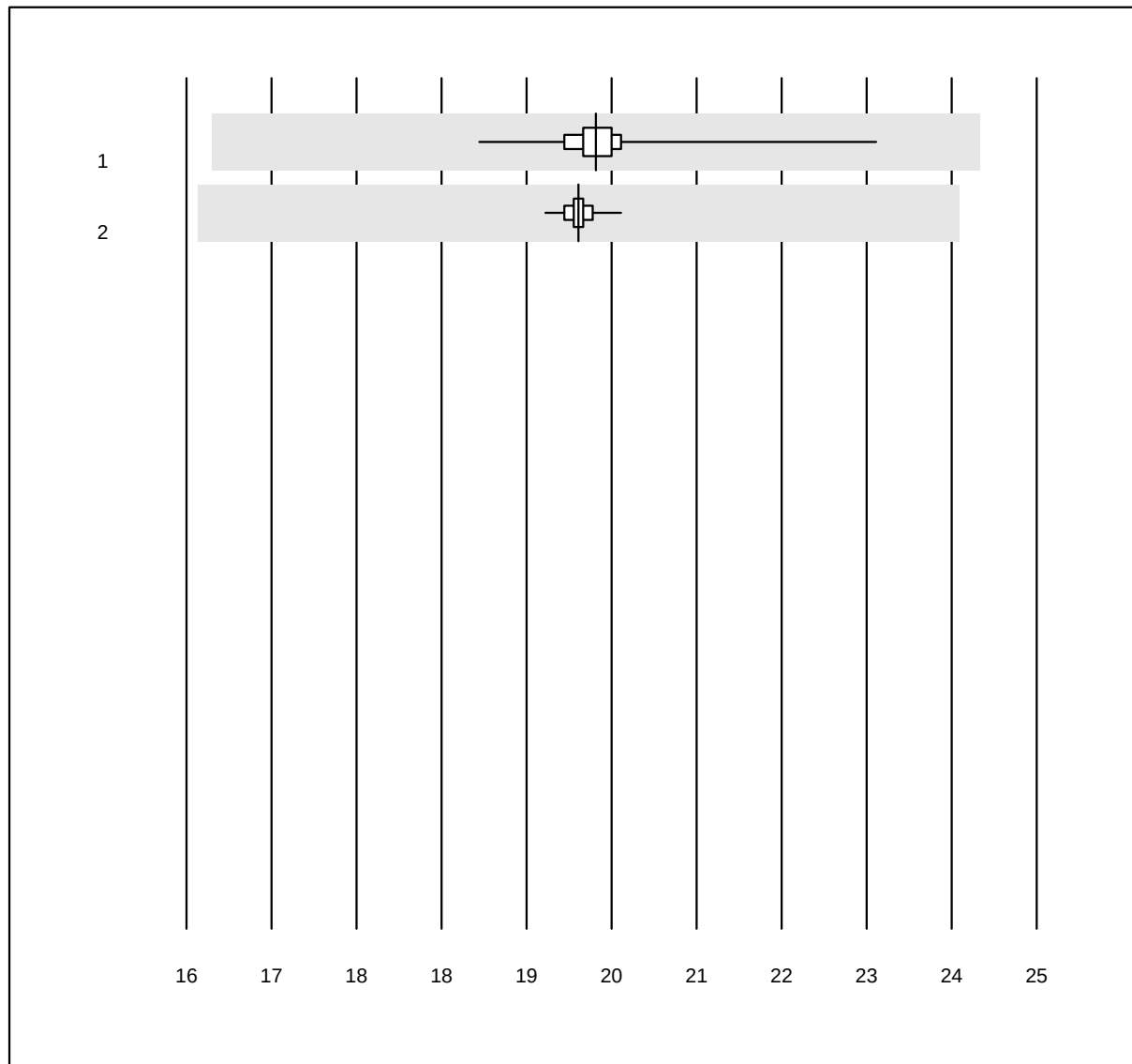


MQ Toleranz: 20%

FCOHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	102	98.0	0.0	2.0	20.334	2.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	154	98.7	0.0	1.3	20.149	0.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

FMetHb OR

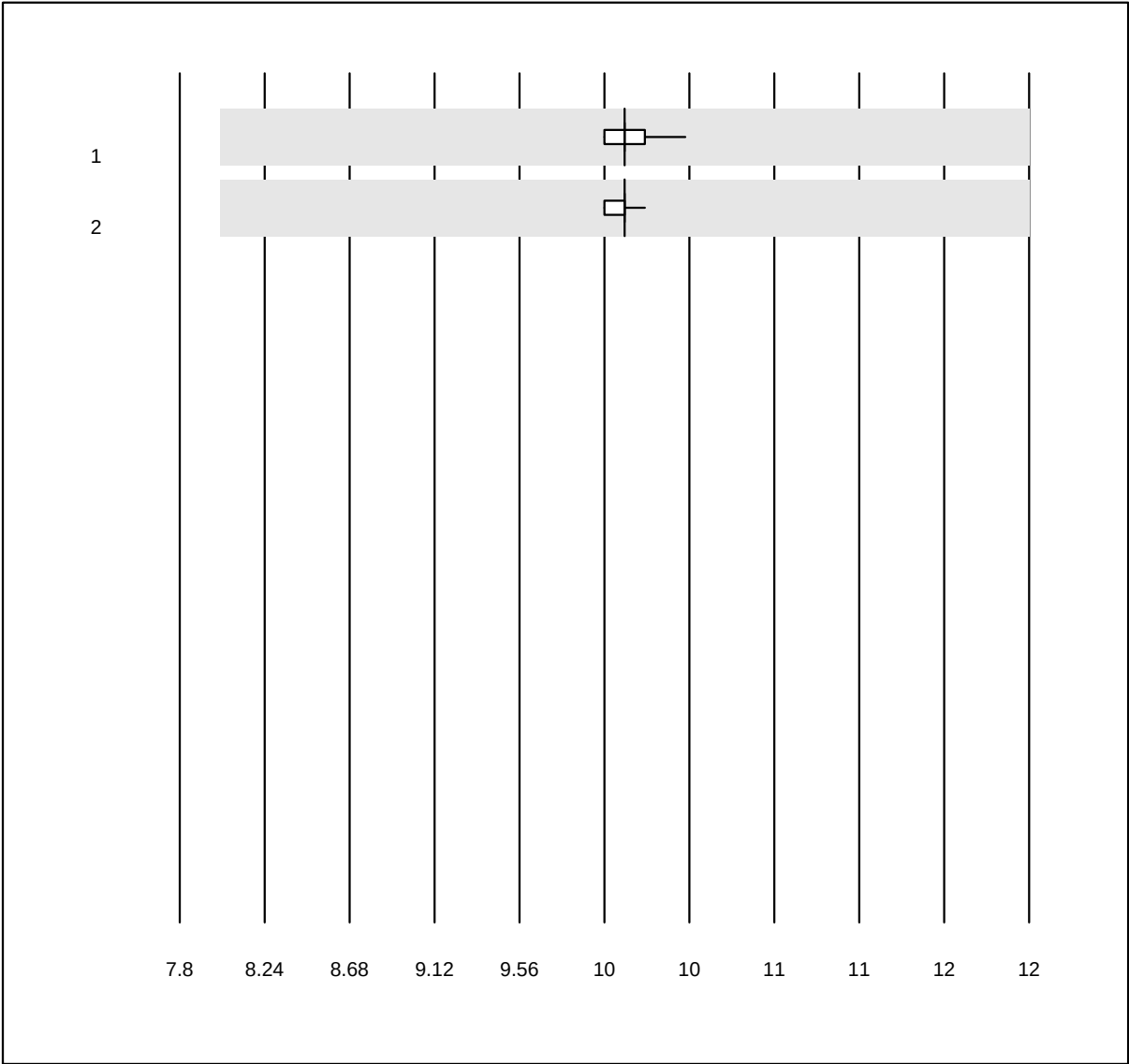


MQ Toleranz: 20%

FMetHb OR (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	102	100.0	0.0	0.0	10.000	0.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	152	100.0	0.0	0.0	10.000	0.4	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

FHbF OR

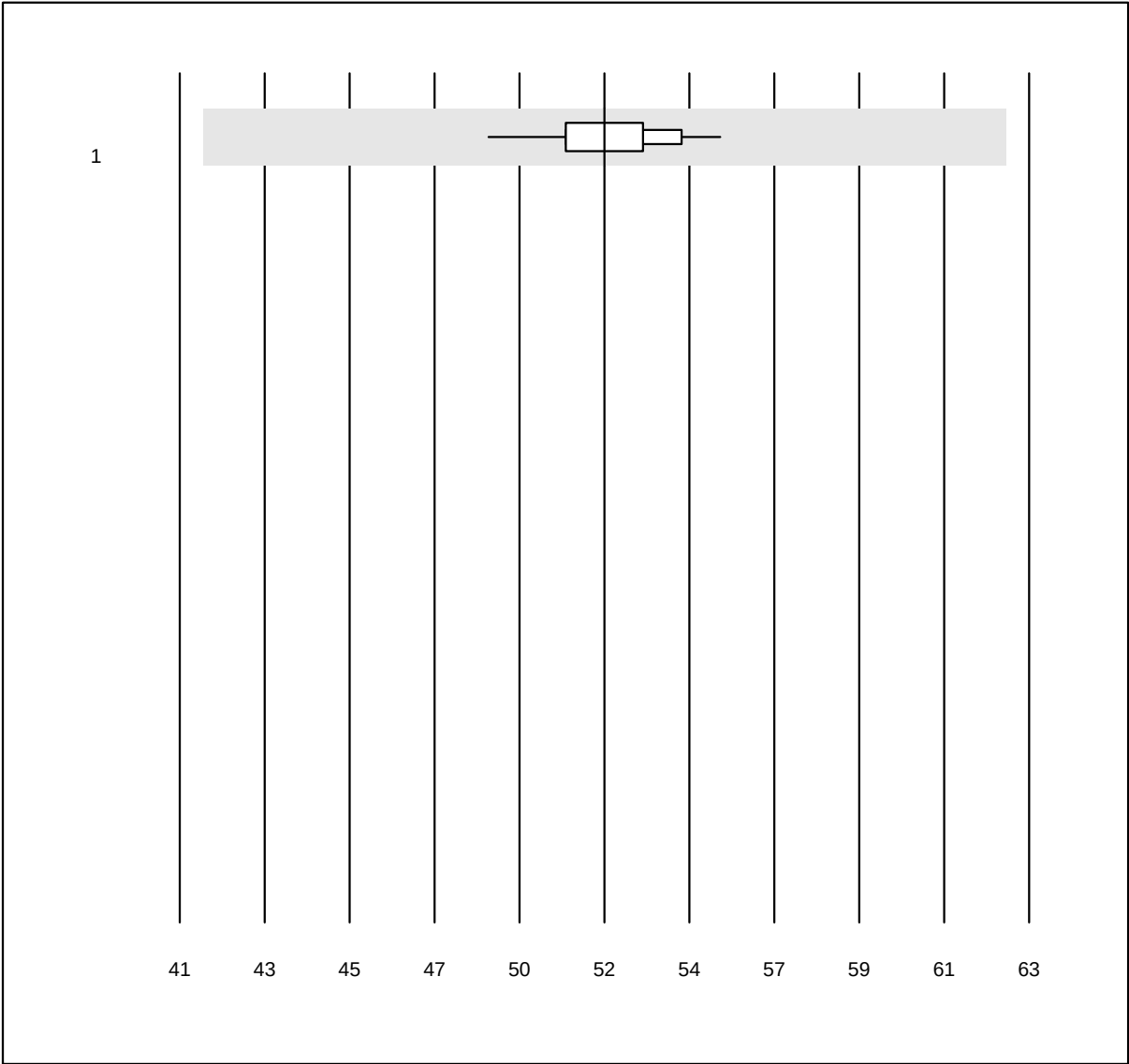


MQ Toleranz: 20%

FHbF OR (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	ABL90 FLEX / PLUS	37	100.0	0.0	0.0	52.000	2.5	e

FHHb

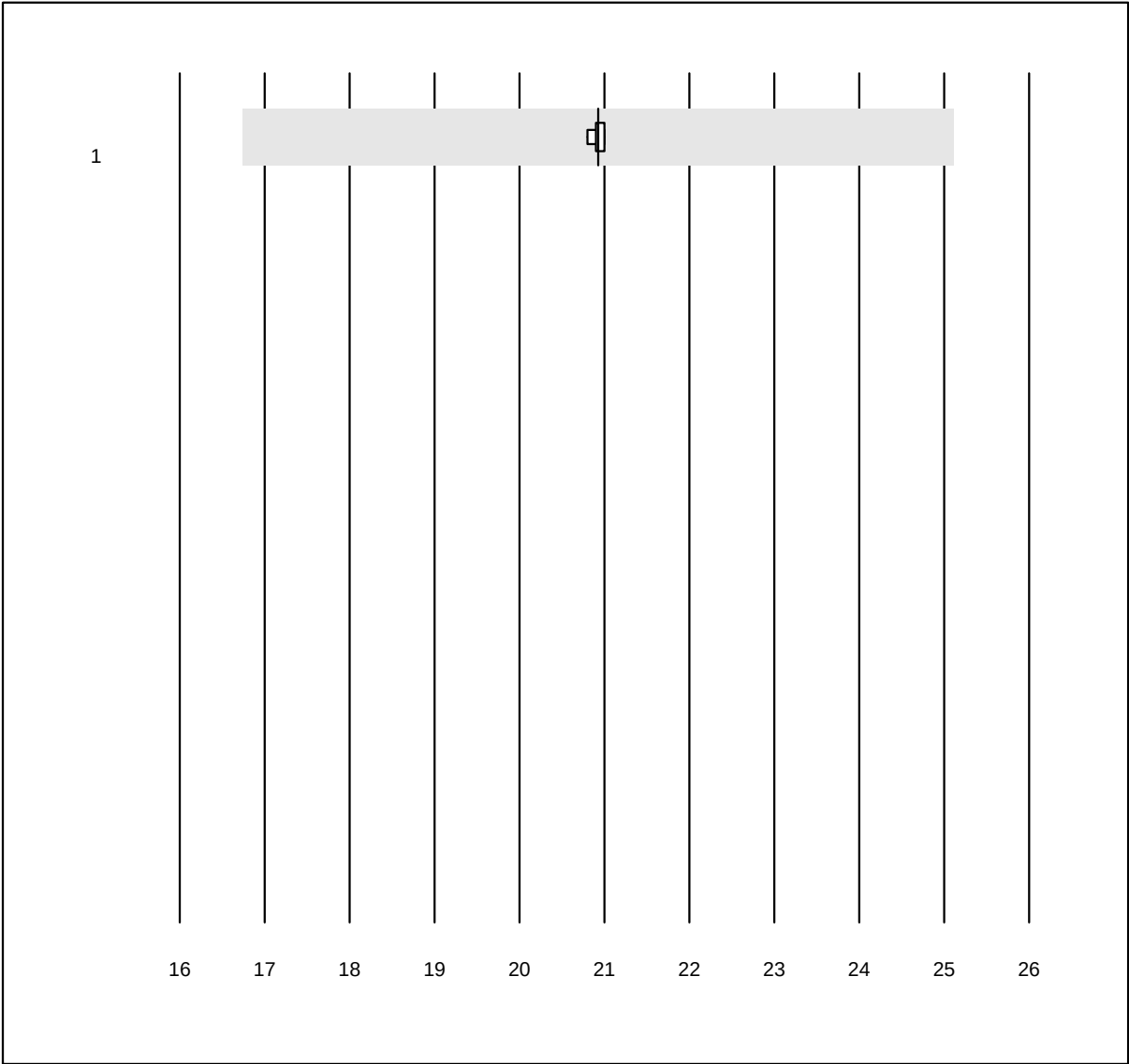


MQ Toleranz: 20%

FHHb (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL90 FLEX / PLUS	16	100.0	0.0	0.0	20.927	0.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

sO2 OR

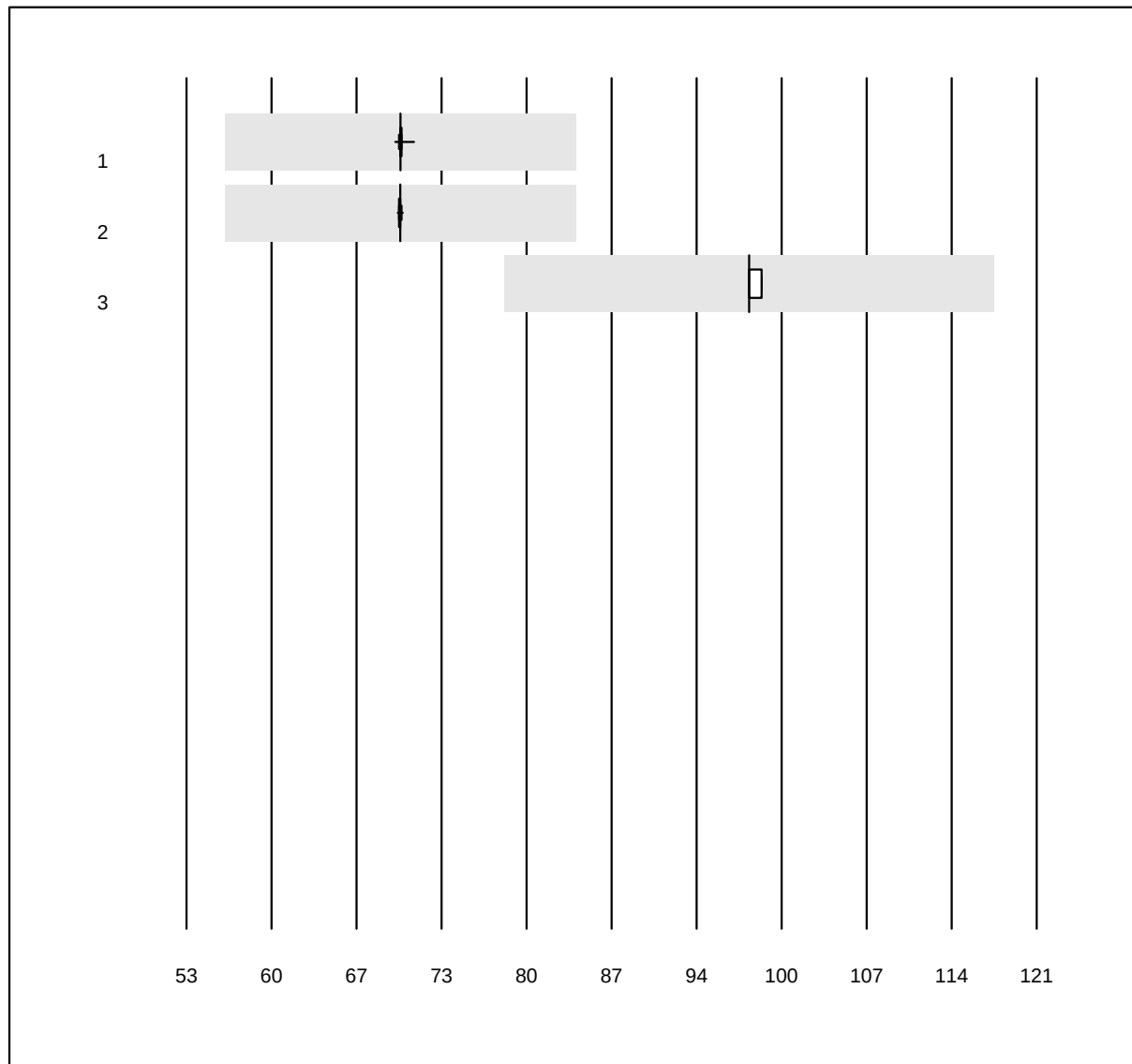


MQ Toleranz: 20%

sO2 OR (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	104	99.0	0.0	1.0	70.114	0.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	148	100.0	0.0	0.0	70.100	0.1	e
3 iStat	33	100.0	0.0	0.0	98.000	0.5	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sodio BG

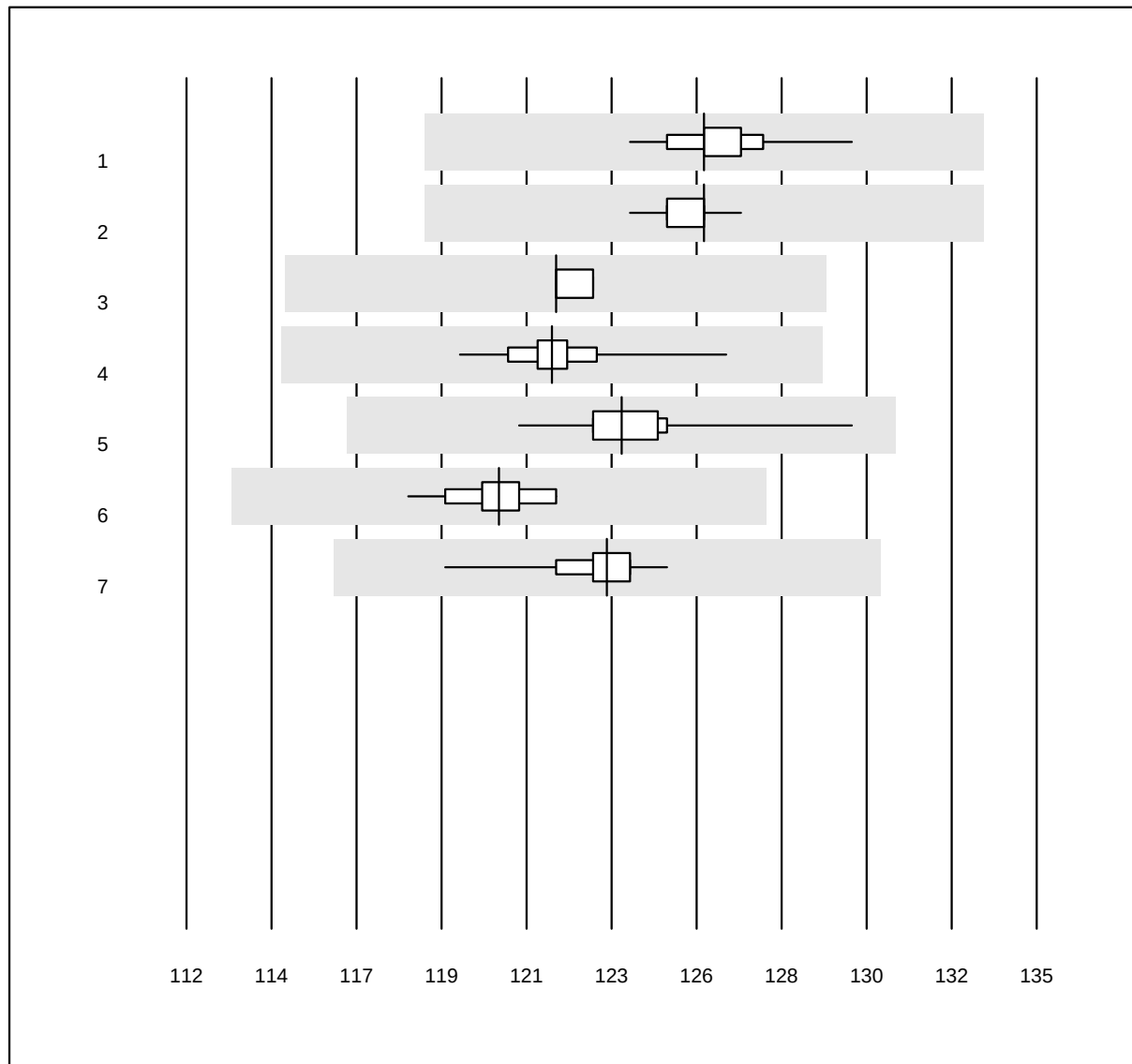


QUALAB Toleranz: 6%

Sodio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	113	100.0	0.0	0.0	126.0	0.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	161	100.0	0.0	0.0	126.0	0.4	e
3 GEM	14	100.0	0.0	0.0	122.0	0.4	e
4 Cobas b 123	19	100.0	0.0	0.0	121.9	1.1	e
5 iStat	24	100.0	0.0	0.0	123.8	1.3	e
6 EPOC	48	100.0	0.0	0.0	120.5	0.8	e
7 RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	123.4	0.9	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Potassio BG

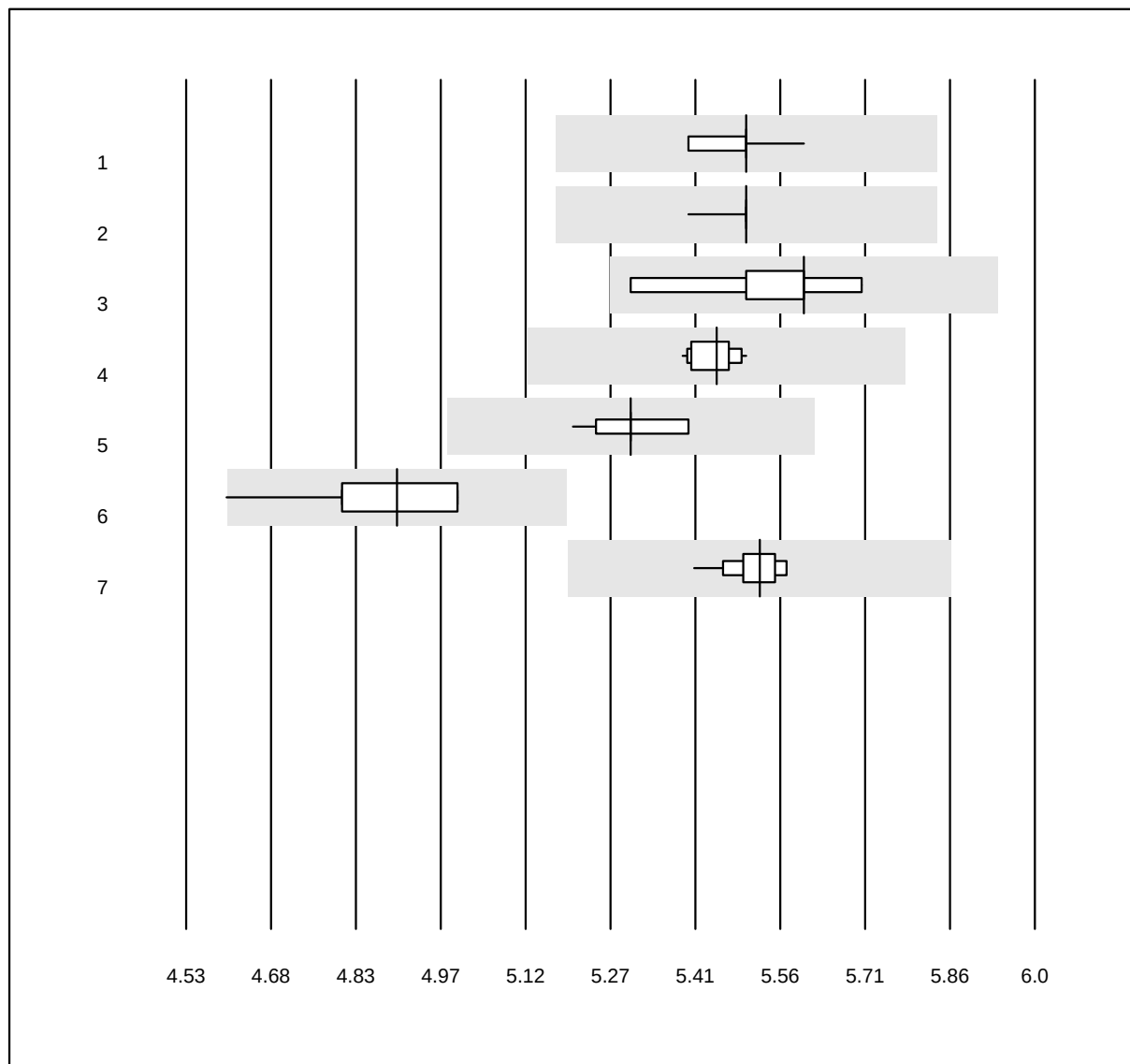


QUALAB Toleranz: 6%

Potassio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	114	100.0	0.0	0.0	5.5	1.0	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	162	100.0	0.0	0.0	5.5	0.5	e
3 GEM	13	100.0	0.0	0.0	5.6	2.3	e
4 Cobas b 123	18	94.4	0.0	5.6	5.4	0.6	e
5 iStat	24	95.8	0.0	4.2	5.3	0.9	e
6 EPOC	50	98.0	2.0	0.0	4.9	1.8	e
7 RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	5.5	0.7	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Cloruro-BG

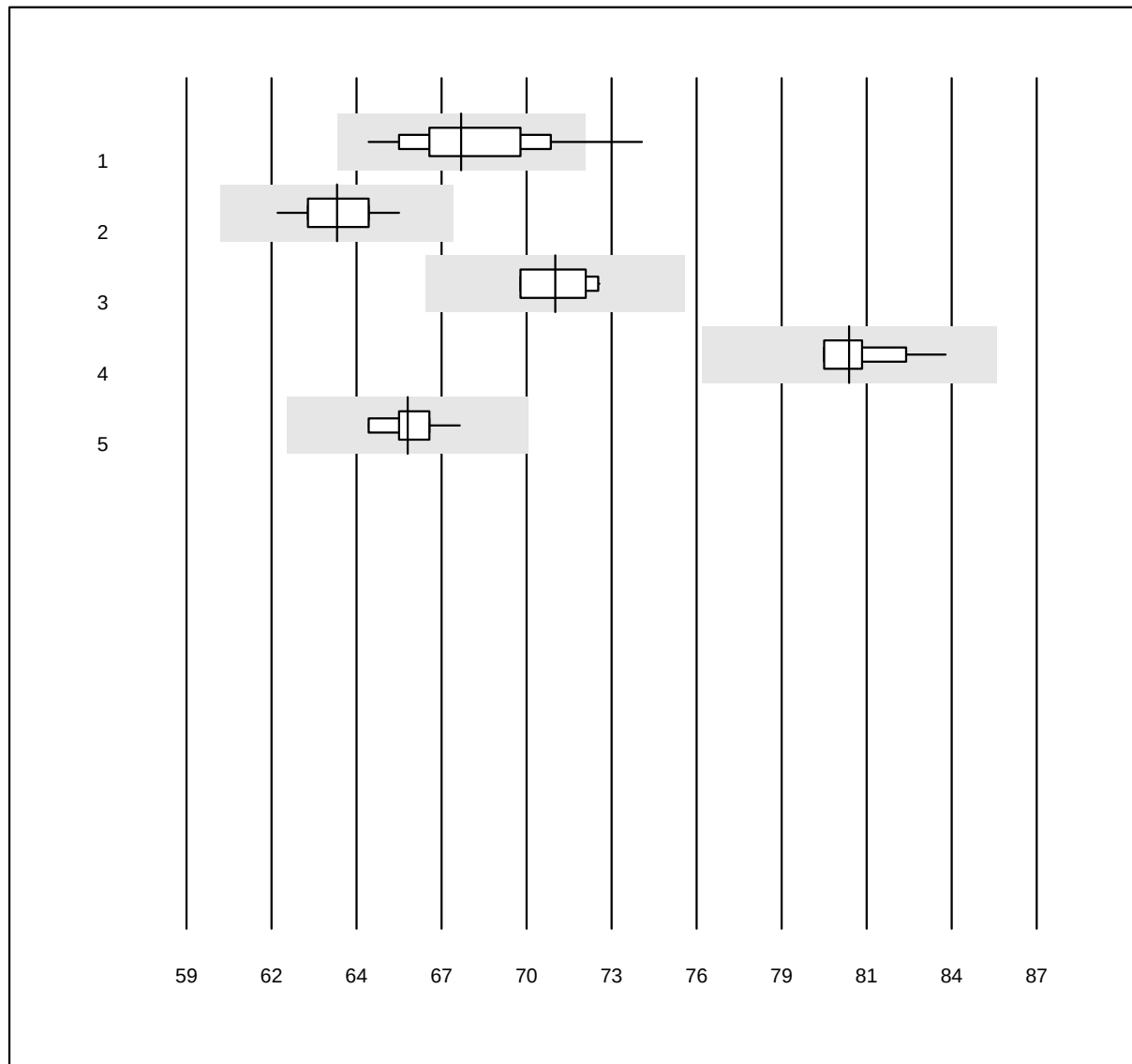


QUALAB Toleranz: 6%

Cloruro-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	111	95.5	3.6	0.9	68.0	3.1	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	155	100.0	0.0	0.0	64.0	1.4	e
3 Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	71.1	1.4	e
4 EPOC	23	95.7	0.0	4.3	80.8	1.3	e
5 RAPIDPoint 500	29	100.0	0.0	0.0	66.3	1.3	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Calcio BG

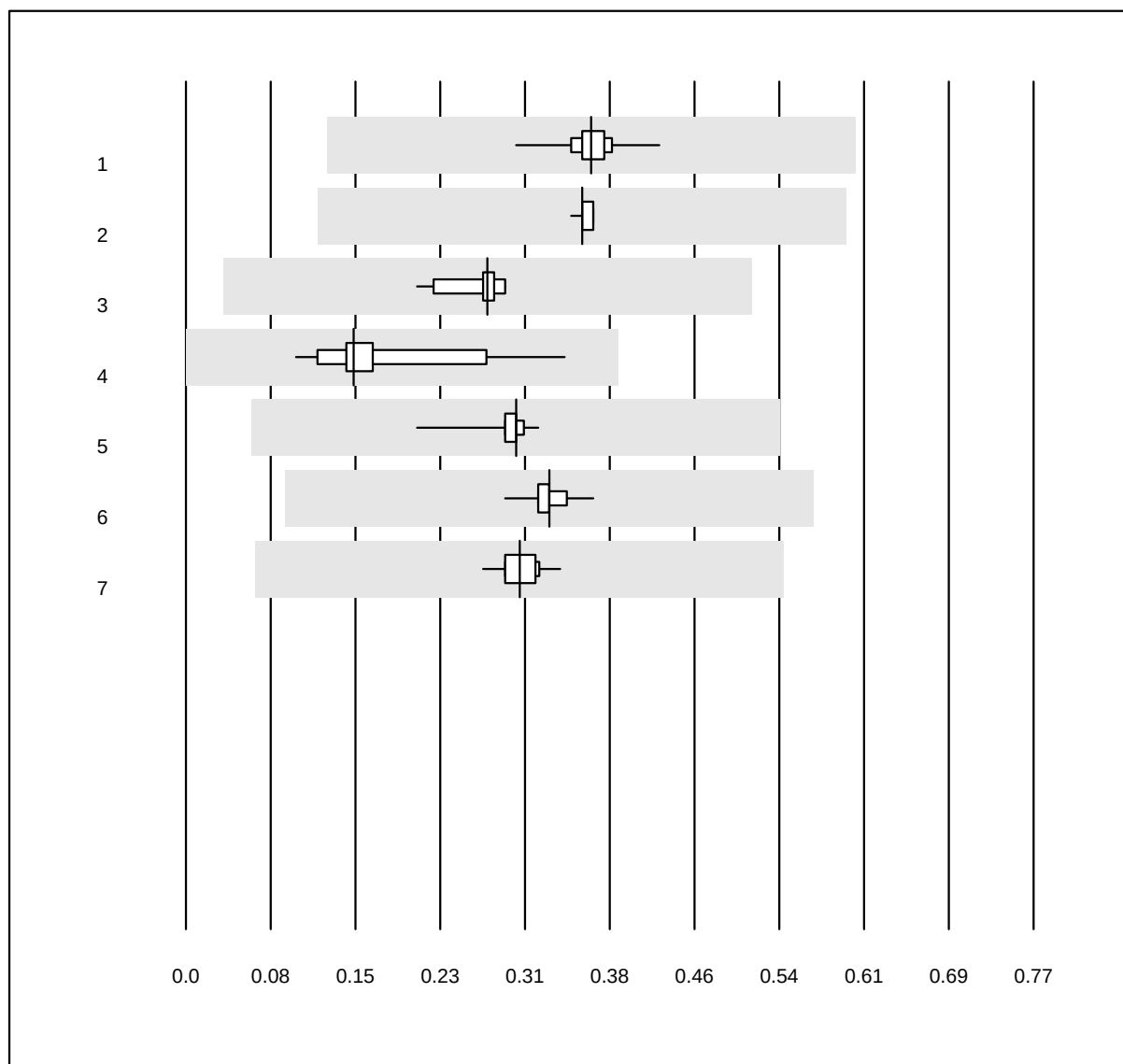


MQ Toleranz: 12%
(< 2.0: +/- 0.24 mmol/l)

Calcio BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	113	99.1	0.0	0.9	0.37	4.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	159	100.0	0.0	0.0	0.36	1.6	e
3 GEM	12	100.0	0.0	0.0	0.27	7.7	e
4 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	0.15	34.1	e
5 iStat	22	100.0	0.0	0.0	0.30	6.8	e
6 EPOC	45	95.6	0.0	4.4	0.33	4.3	e
7 RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	0.30	5.0	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio GS

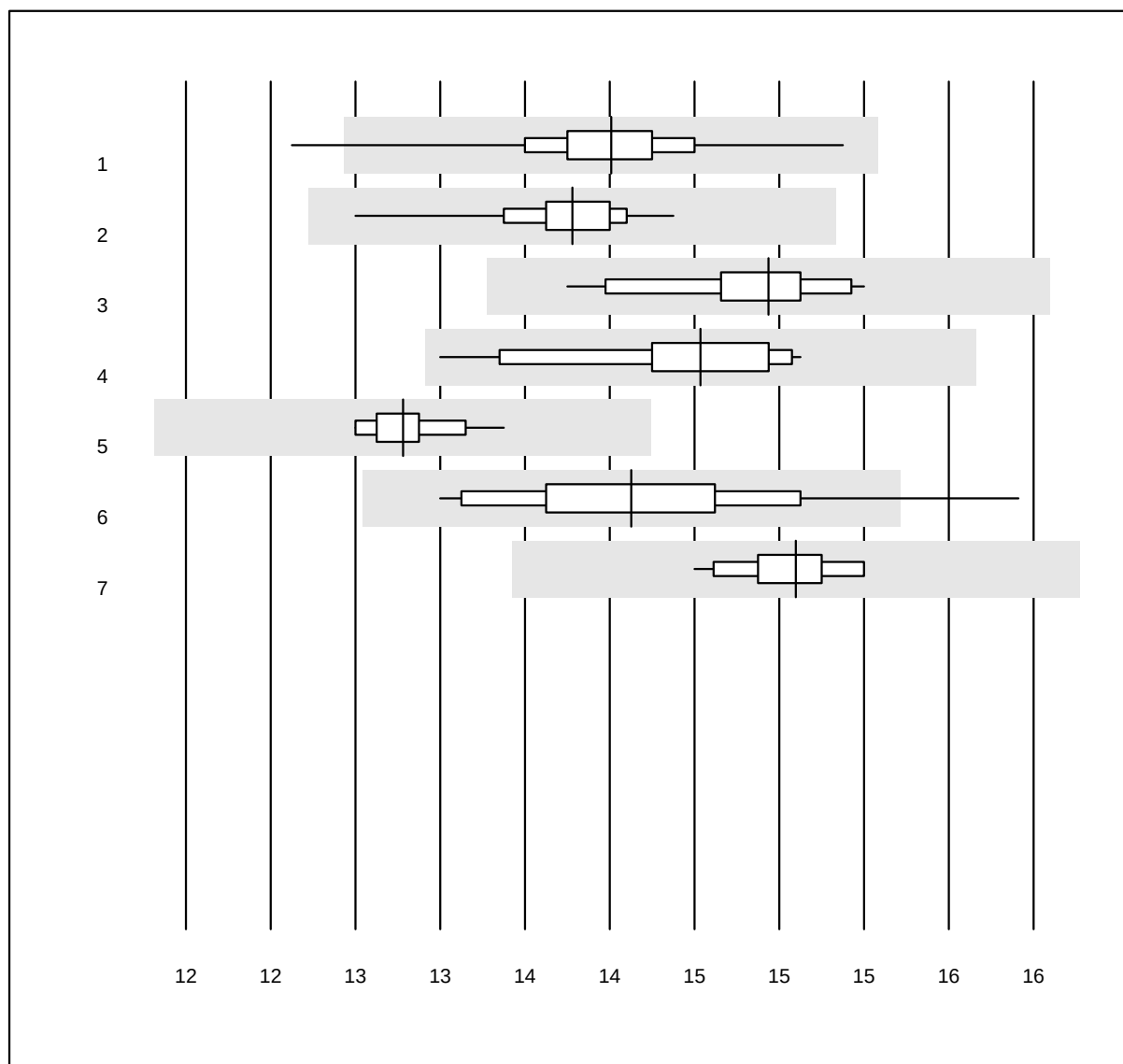


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio GS (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	114	99.1	0.9	0.0	14.0	2.7	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	151	100.0	0.0	0.0	13.8	1.8	e
3 GEM	12	100.0	0.0	0.0	14.7	2.5	e
4 Cobas b 123	13	100.0	0.0	0.0	14.4	3.2	e
5 iStat	15	100.0	0.0	0.0	13.0	1.4	e
6 EPOC	48	95.8	4.2	0.0	14.1	4.2	e
7 RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	14.9	1.6	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Lattato-BG

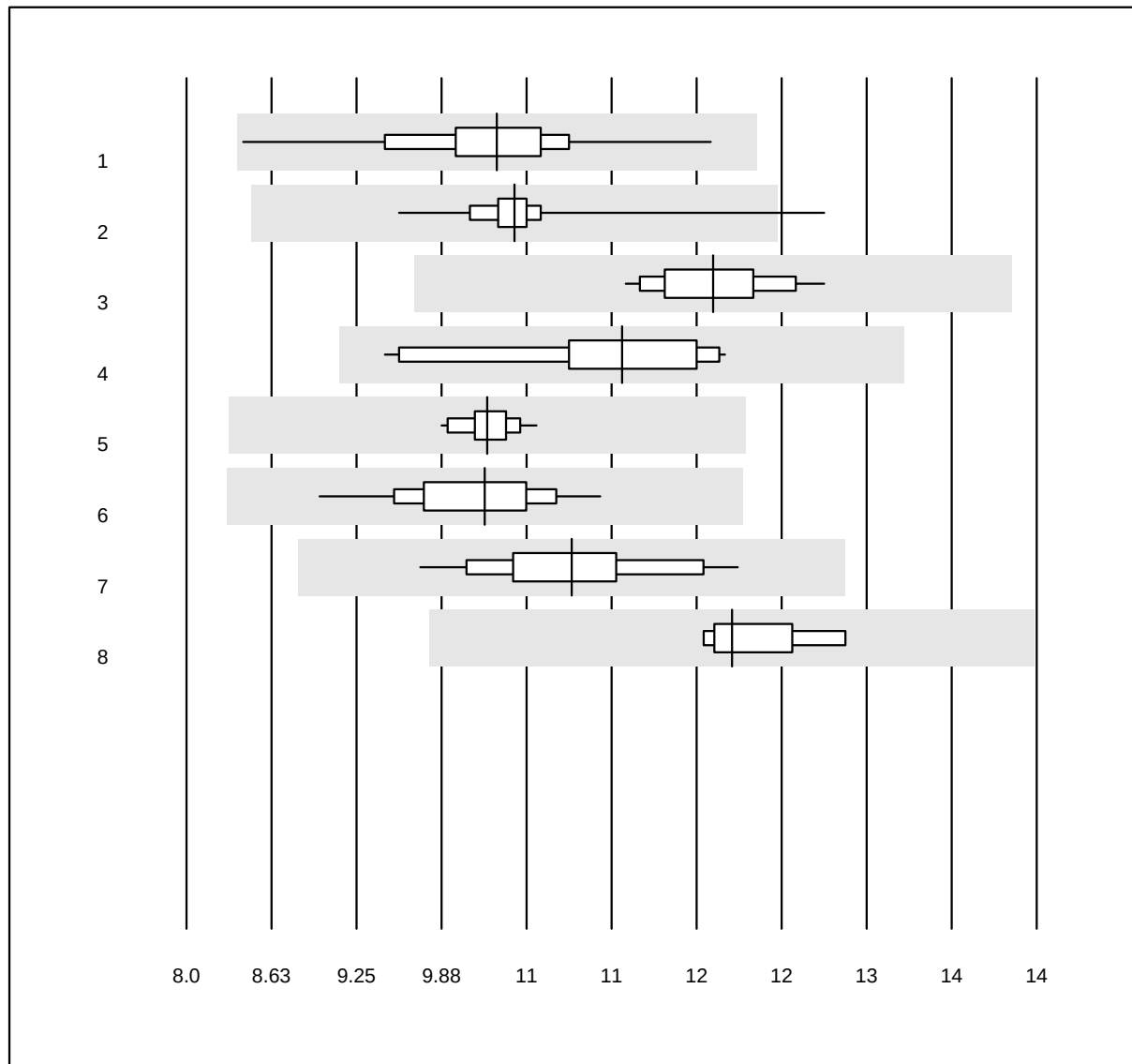


QUALAB Toleranz: 18%

Lattato-BG (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	119	100.0	0.0	0.0	10.19	5.2	e
2 ABL90 FLEX / PLUS	164	99.4	0.6	0.0	10.31	2.8	e
3 GEM	14	100.0	0.0	0.0	11.72	3.2	e
4 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	11.07	7.0	e
5 iStat	20	100.0	0.0	0.0	10.12	1.8	e
6 EPOC	46	95.7	0.0	4.3	10.10	4.3	e
7 RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	10.72	5.3	e
8 IL	4	100.0	0.0	0.0	11.85	2.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Troponina T

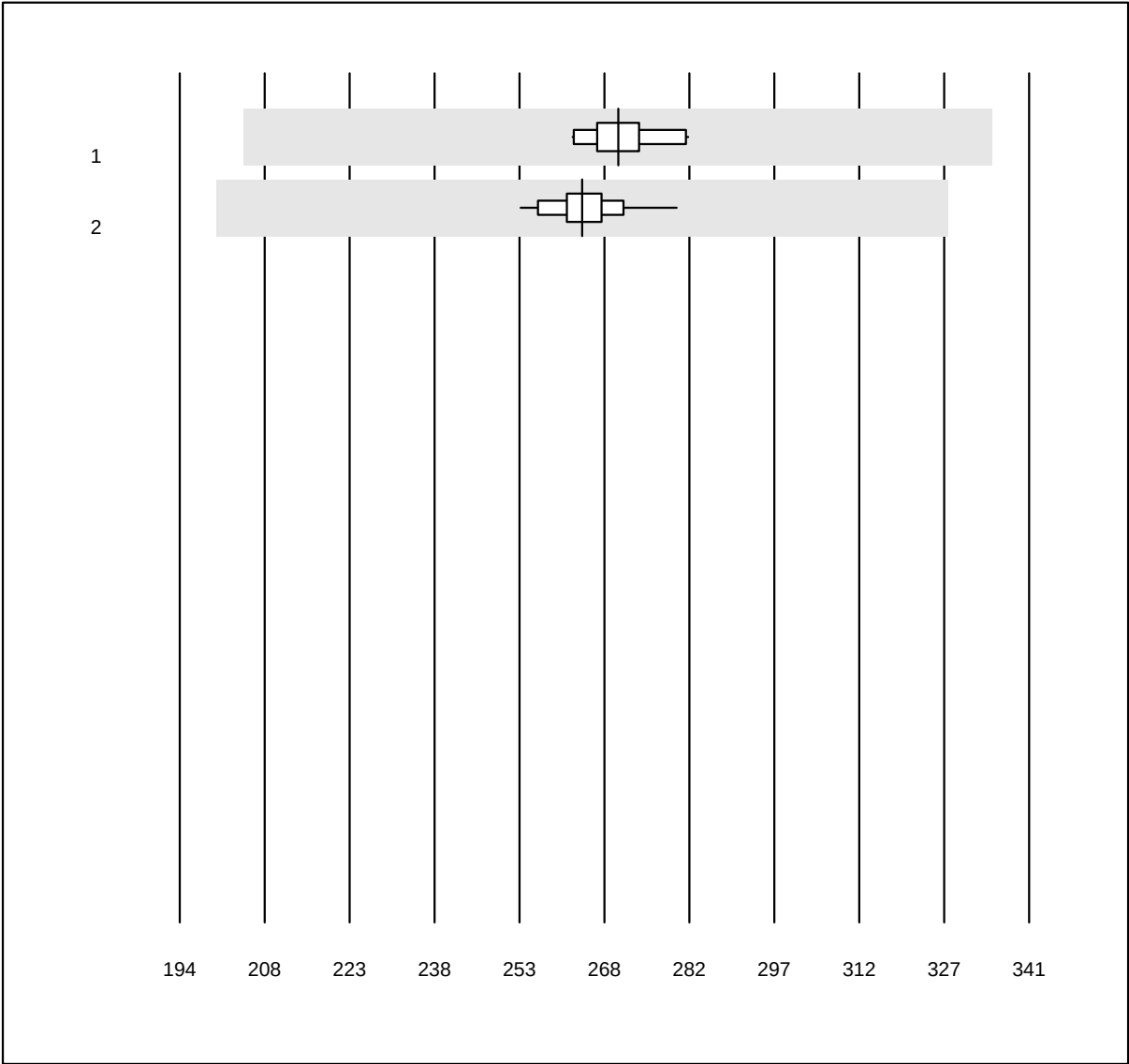


QUALAB Toleranz: 24%

Troponina T (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Cobas hs	10	100.0	0.0	0.0	269.91	2.2	e
2 Cobas hs STAT	25	100.0	0.0	0.0	263.65	2.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Troponina I

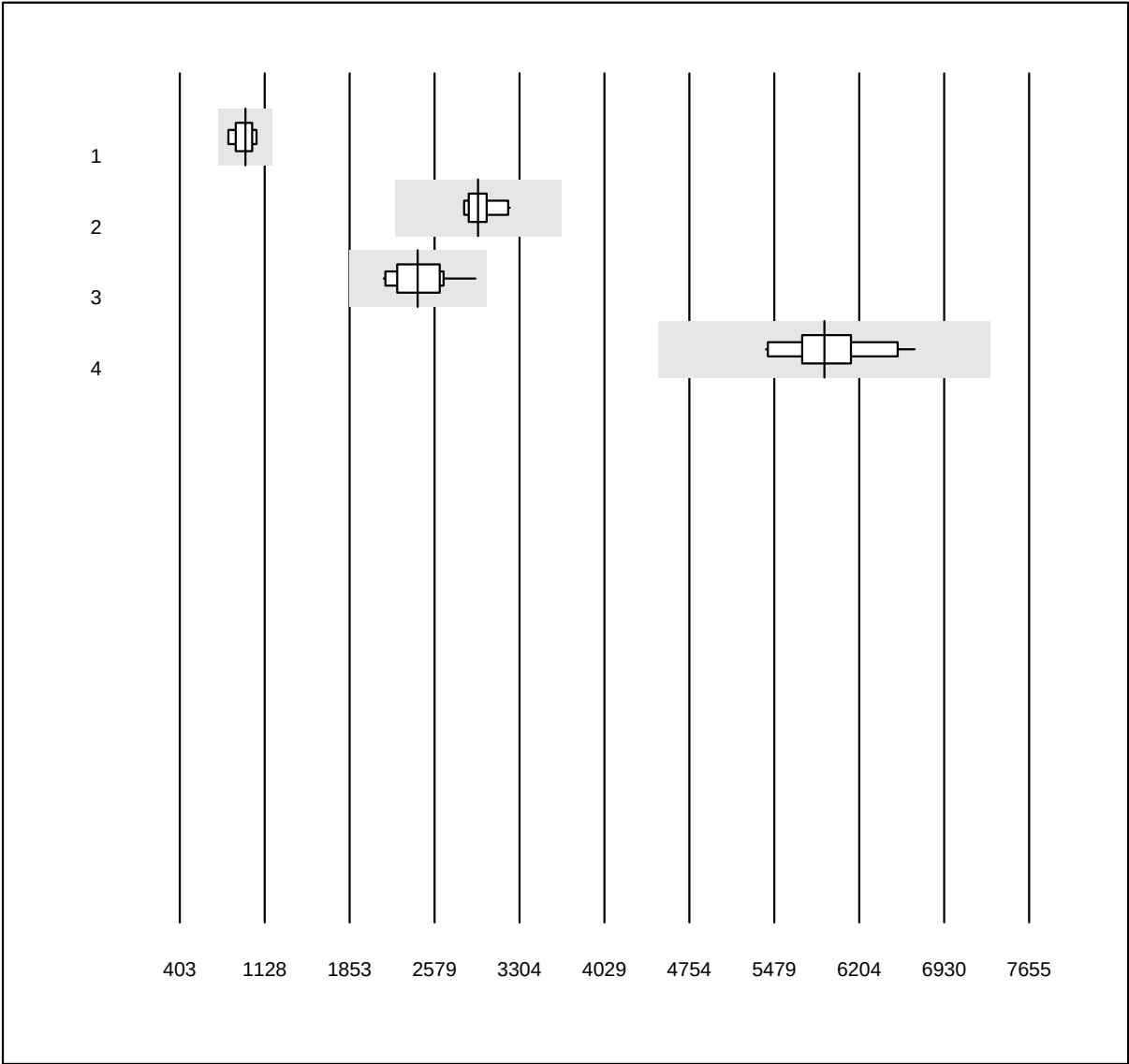


QUALAB Toleranz: 24%

Troponina I (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	964.2	7.7	e*
2 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	2949.9	4.0	e
3 Pathfast	20	100.0	0.0	0.0	2434.7	8.5	e
4 Vidas	14	100.0	0.0	0.0	5907.4	6.0	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

NT-proBNP

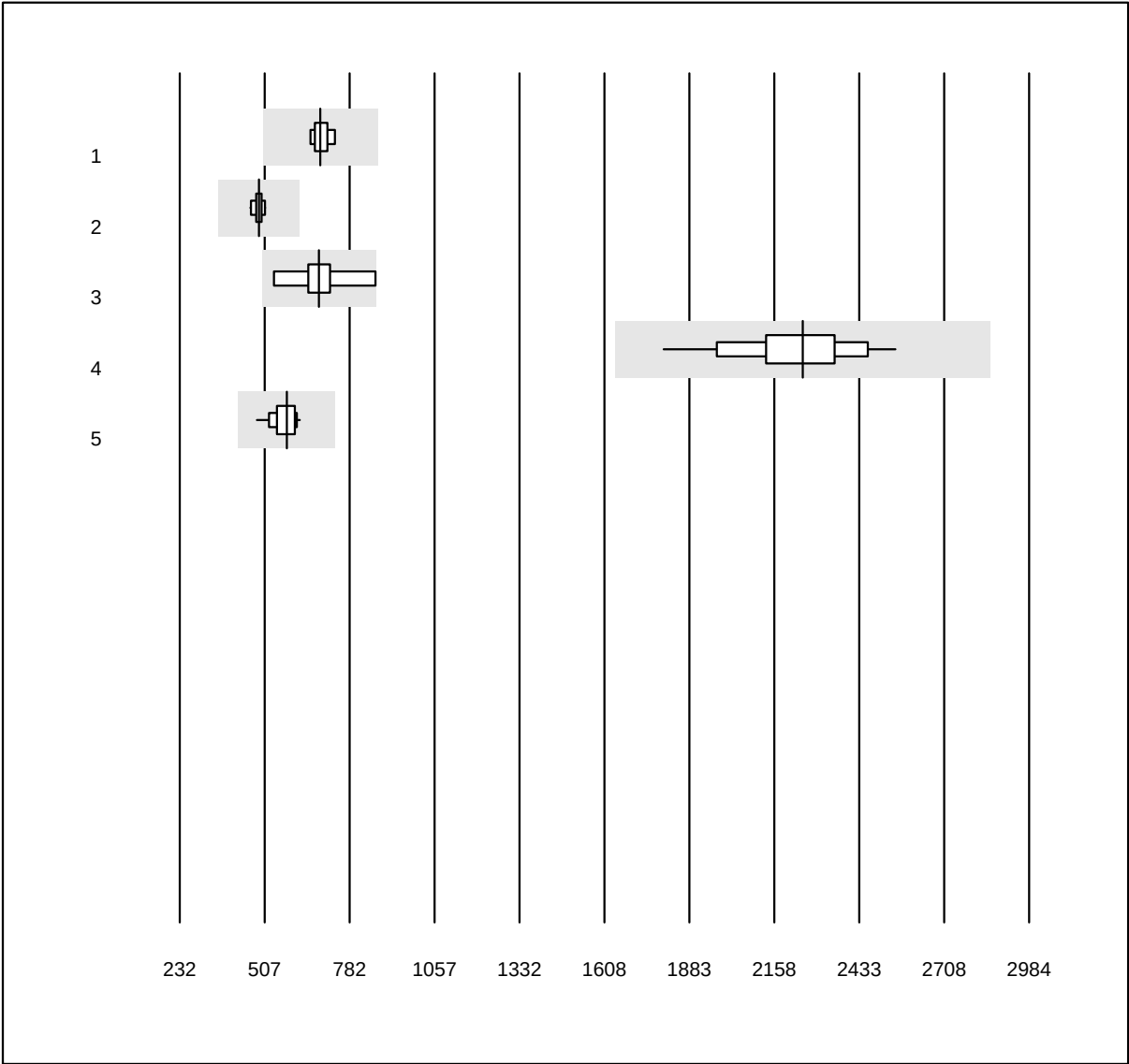


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	687.4	3.4	e
2 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	488.8	2.7	e
3 VIDAS	9	88.9	0.0	11.1	683.0	12.4	e*
4 Pathfast	16	100.0	0.0	0.0	2250.8	7.9	e
5 Cobas E / Elecsys	31	100.0	0.0	0.0	579.0	6.1	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CK-MB massa

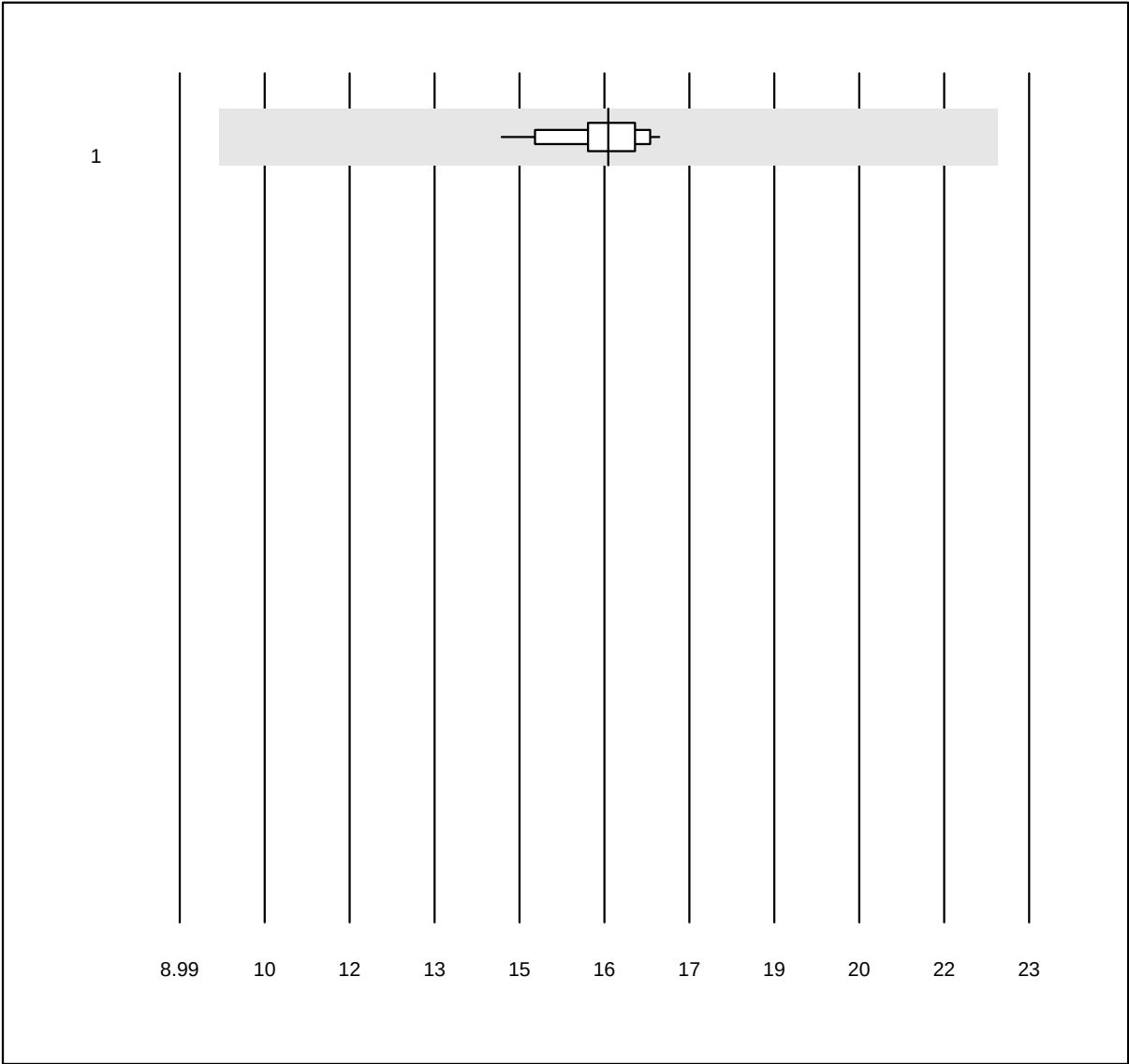


MQ Toleranz: 40%

CK-MB massa (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas E / Elecsys	14	100.0	0.0	0.0	16.1	4.0	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Mioglobina

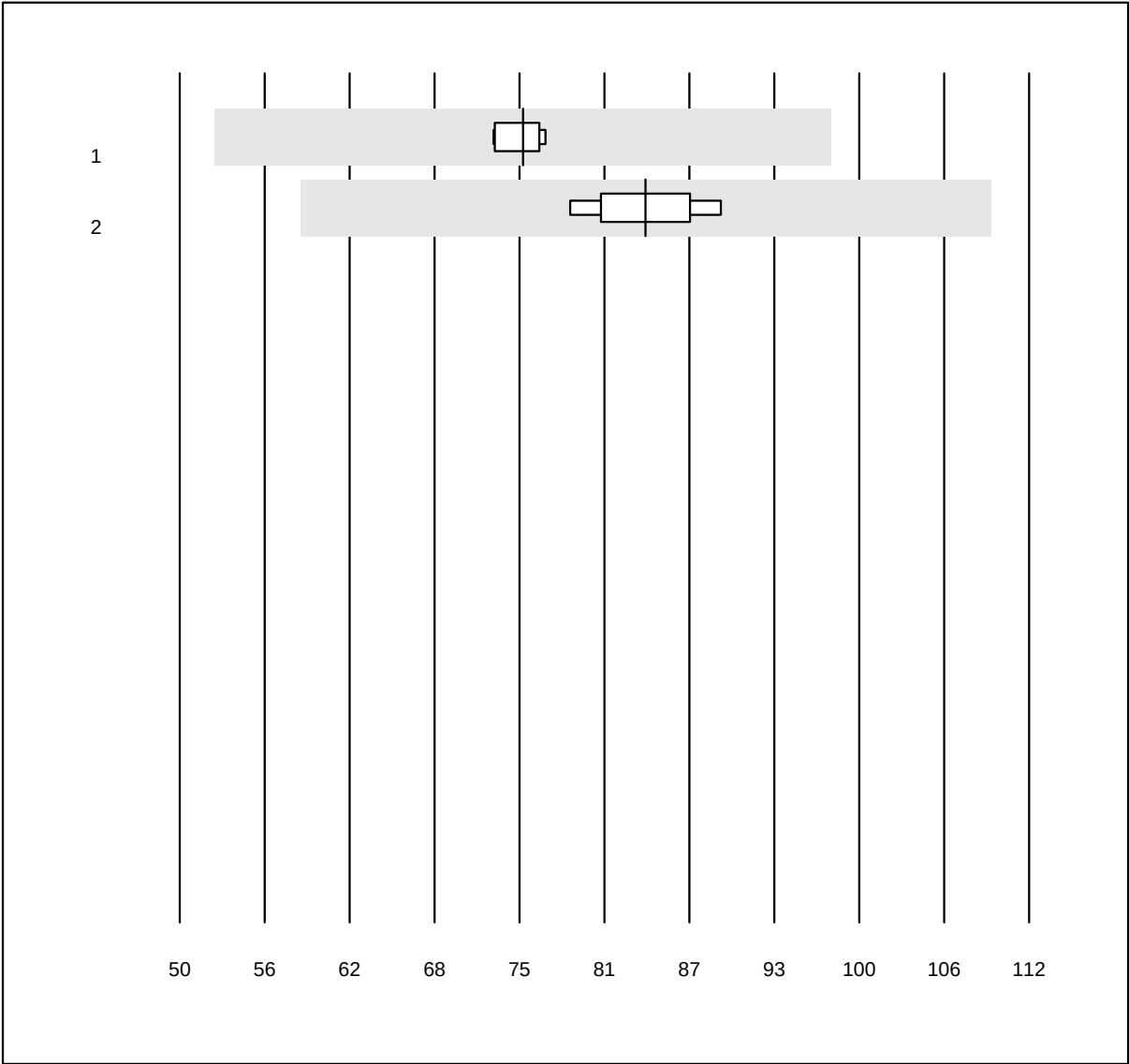


QUALAB Toleranz: 30%

Mioglobina (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas E / Elecsys	10	100.0	0.0	0.0	75.1	2.1	e
2	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	84.0	4.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

17-OH-Progesterone

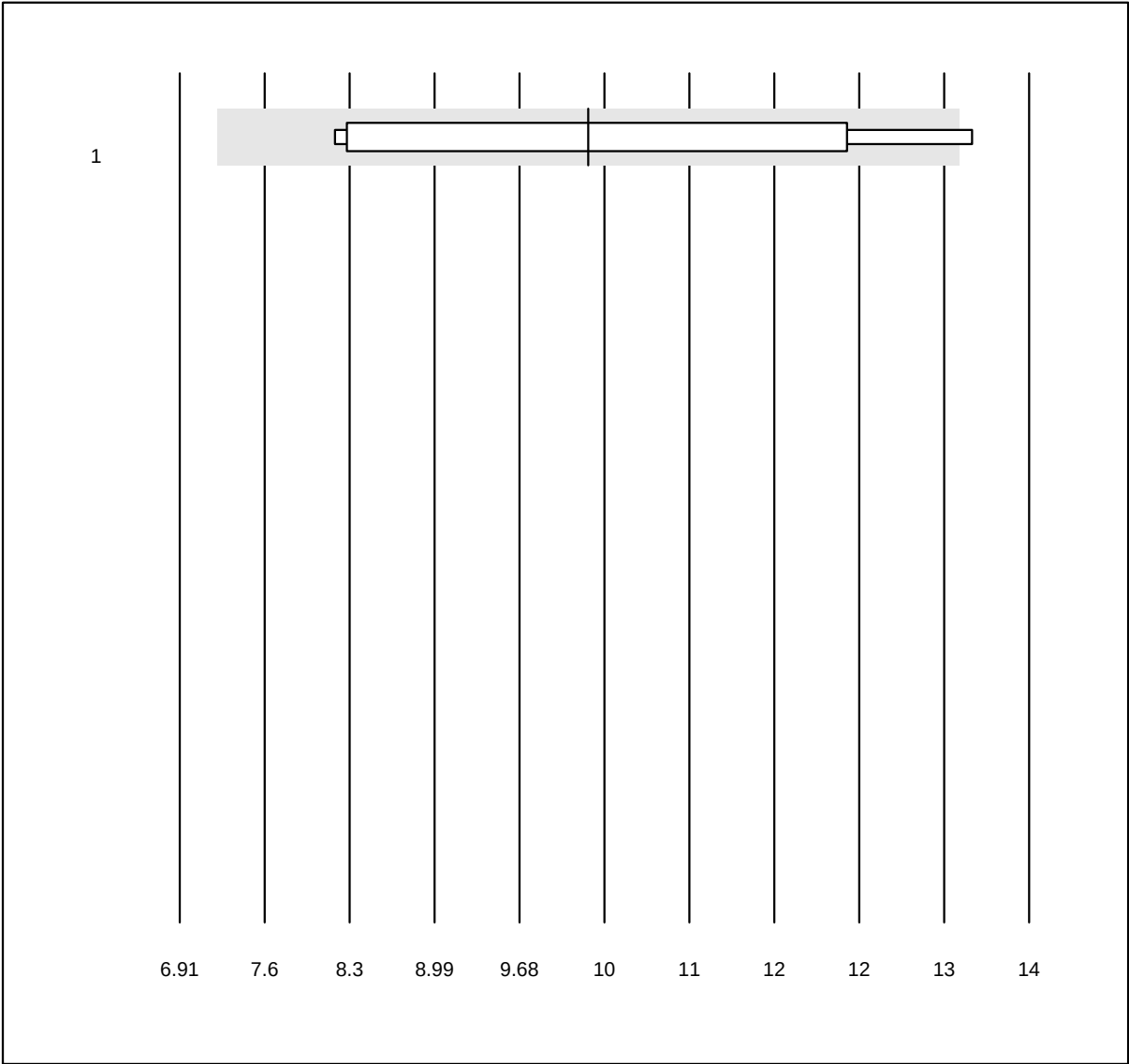


MQ Toleranz: 30%

17-OH-Progesterone
(nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	10.3	20.4	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Androstendione

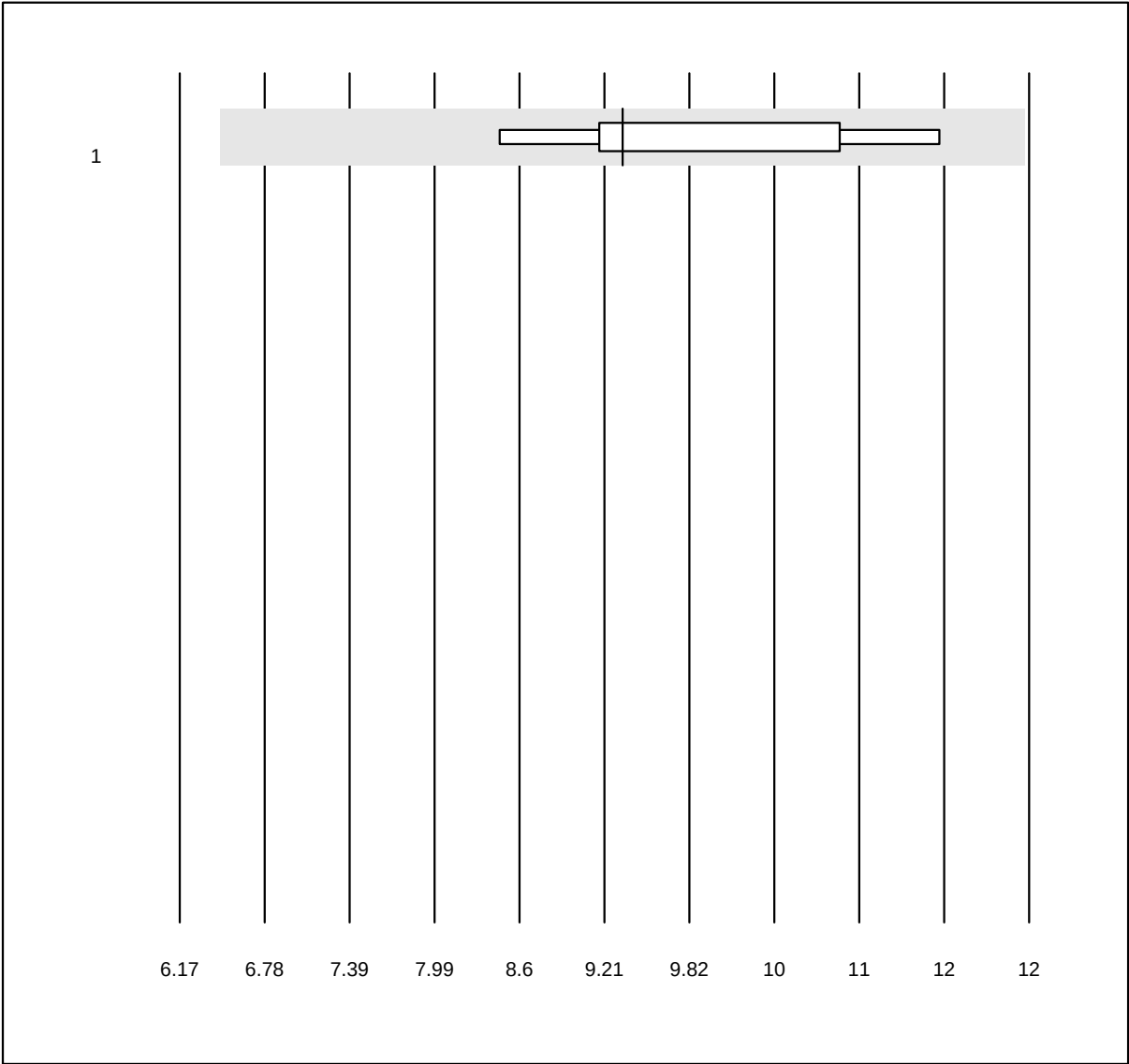


MQ Toleranz: 30%

Androstendione (nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	9.2	10.5	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Beta-HCG totale

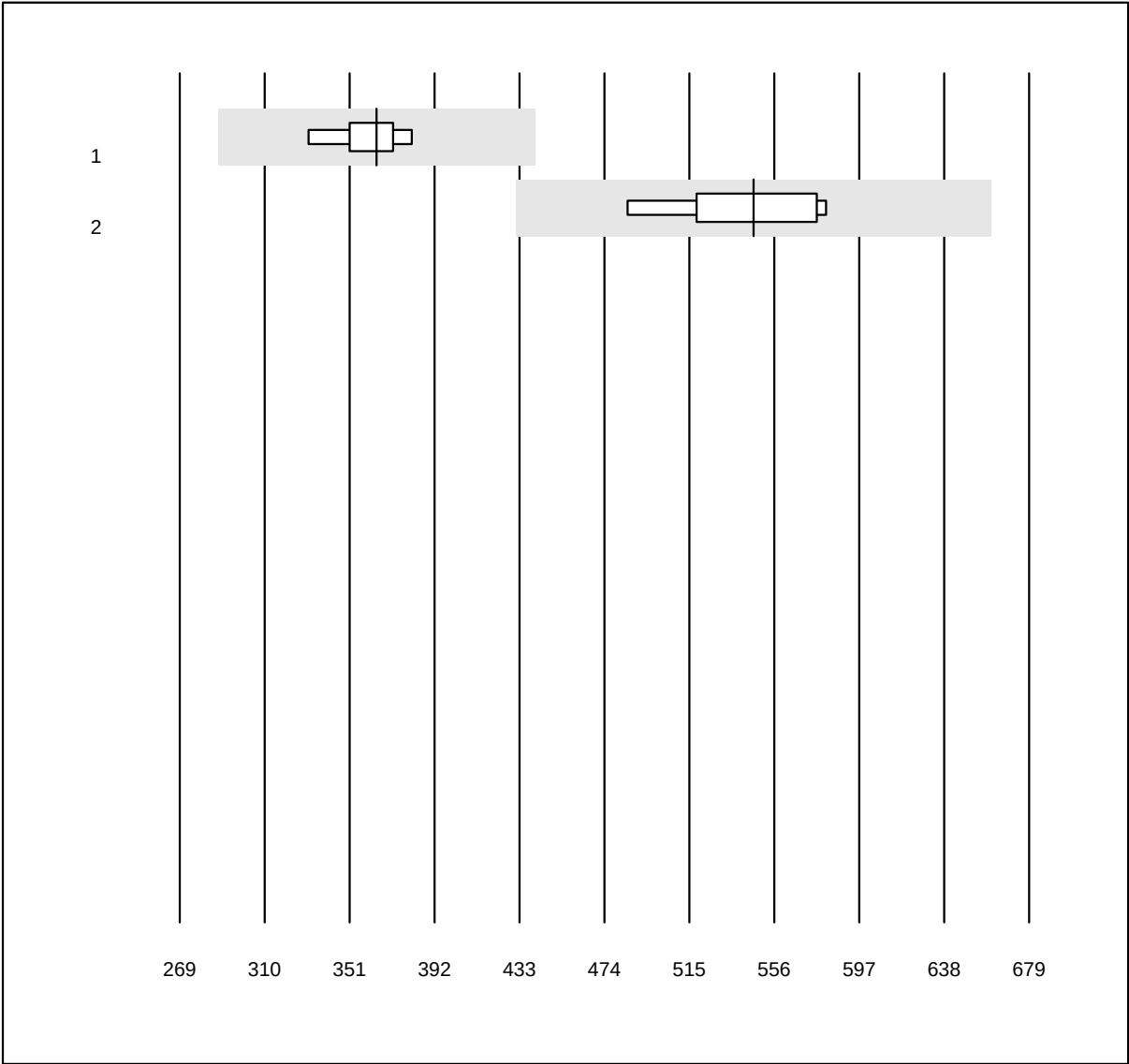


QUALAB Toleranz: 21%

Beta-HCG totale (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	5	100.0	0.0	0.0	364.0	3.7	e
2 AFIAS	6	83.3	0.0	16.7	546.0	5.8	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Cortisolo

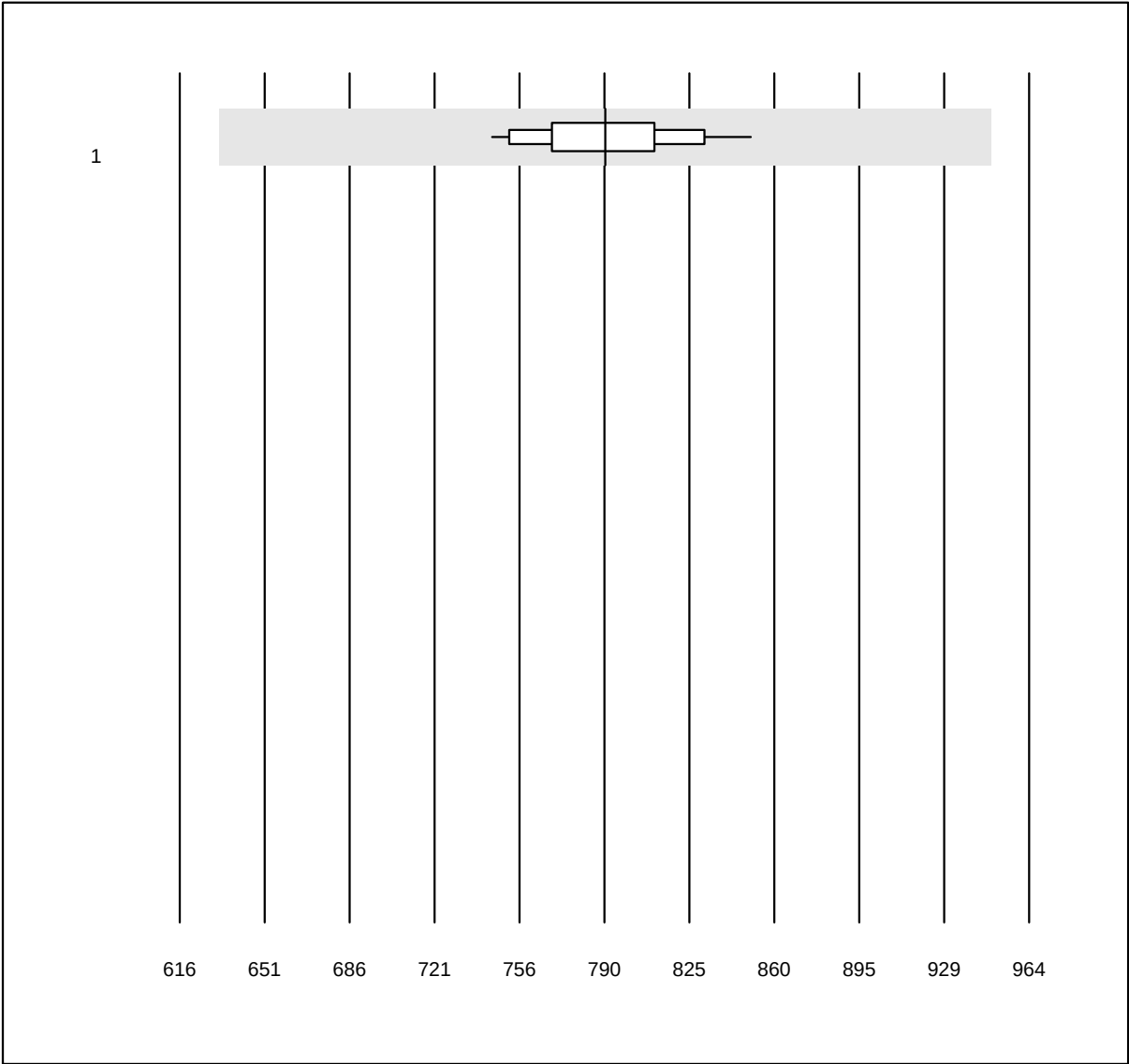


QUALAB Toleranz: 20%

Cortisolo (nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	26	100.0	0.0	0.0	790	3.6	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

DHEAS

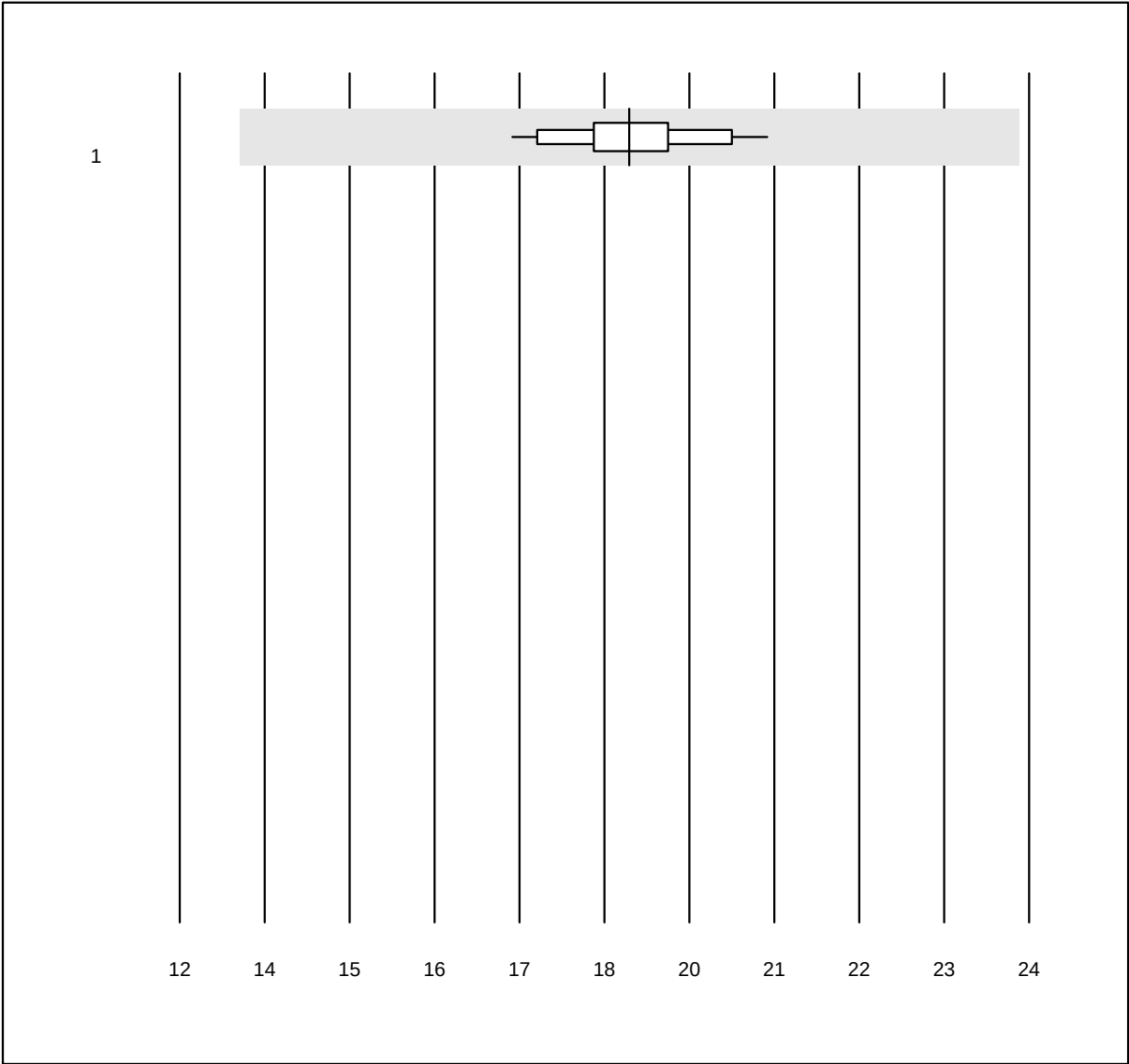


MQ Toleranz: 30%

DHEAS (μmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	18.35	4.9	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Estradiolo

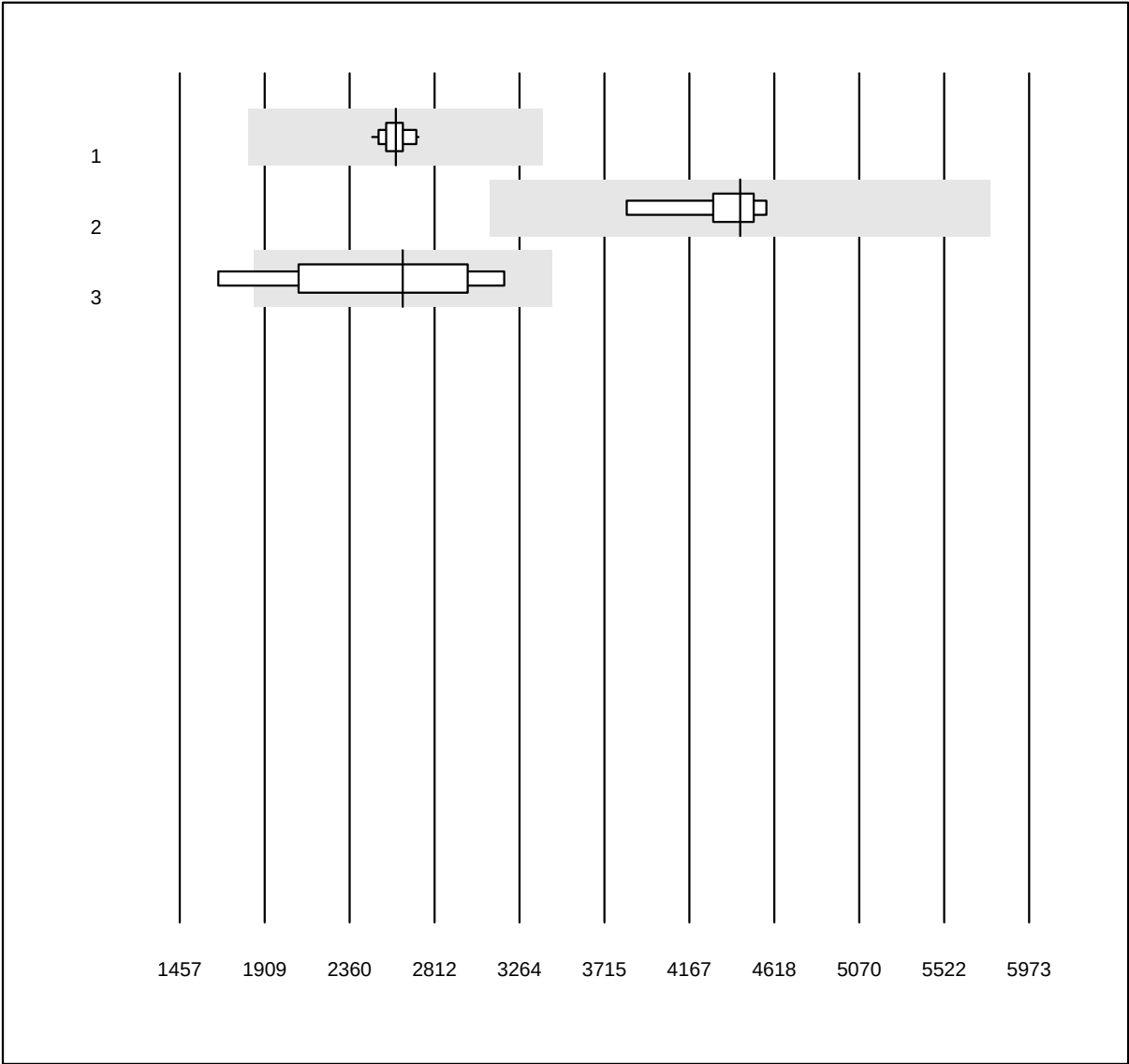


QUALAB Toleranz: 30%

Estradiolo (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	17	100.0	0.0	0.0	2606	2.5	e
2 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	4437	5.1	e
3 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	2642	19.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ormone follicolo-stimolante

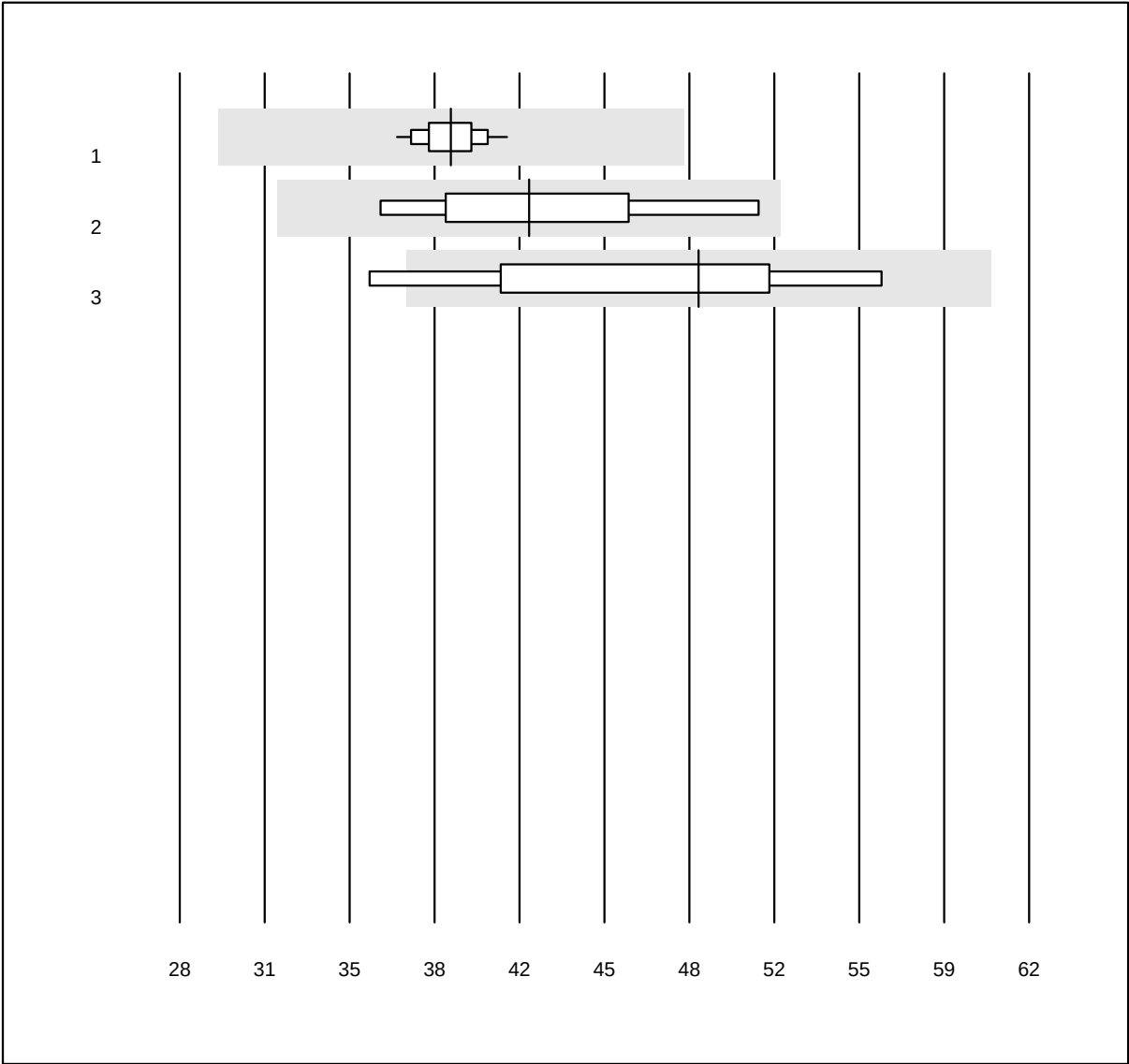


QUALAB Toleranz: 24%

Ormone follicolo-stimolante
(U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	16	100.0	0.0	0.0	38.9	2.9	e
2 ADVIA Centaur XP/CP	5	100.0	0.0	0.0	42.0	10.2	e*
3 altri metodi	5	80.0	0.0	20.0	48.8	12.4	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HGH

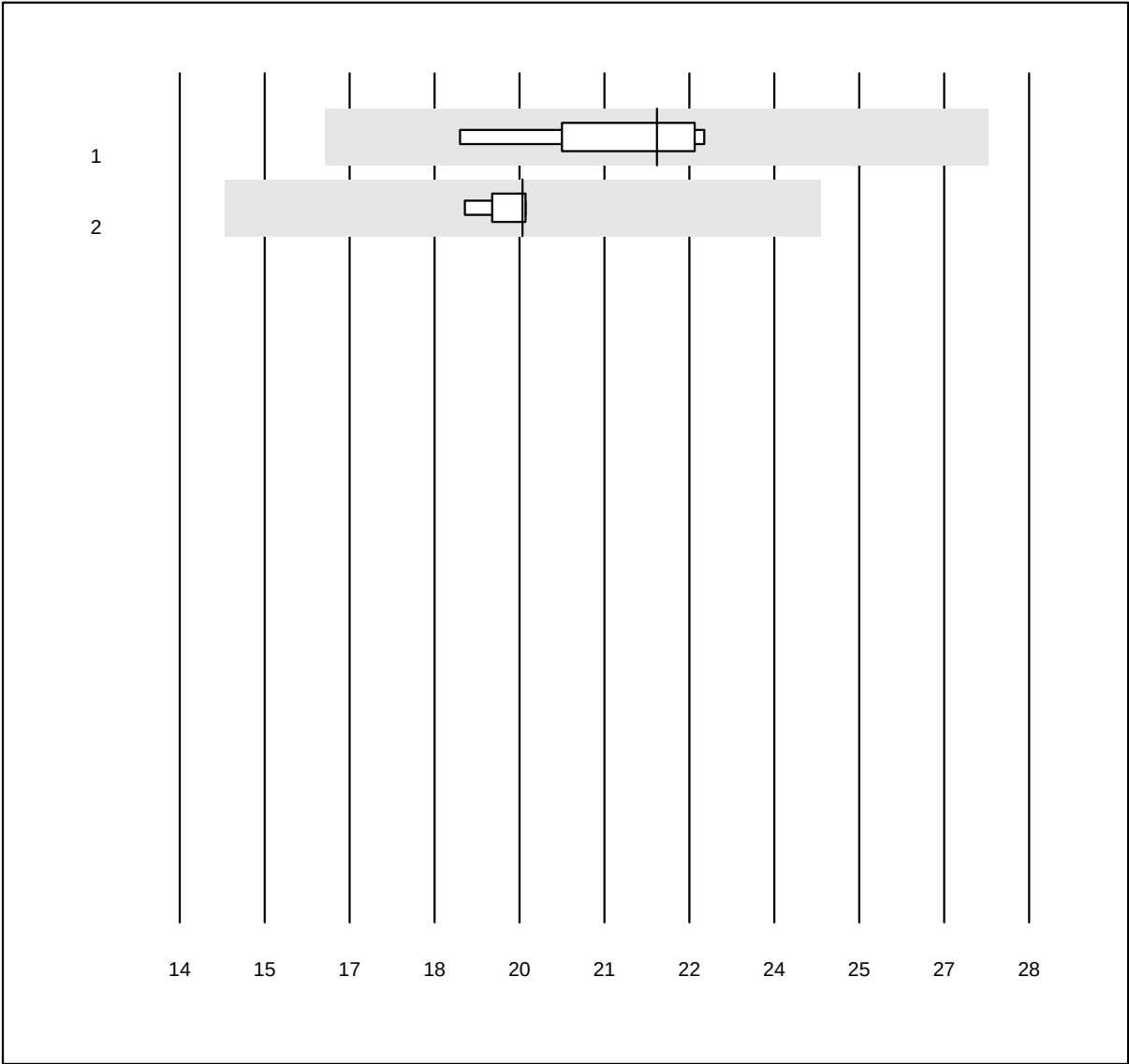


MQ Toleranz: 25%

HGH (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 altri metodi	7	85.7	0.0	14.3	21.87	6.1	e
2 Liaison	4	100.0	0.0	0.0	19.65	1.7	e

Insulina

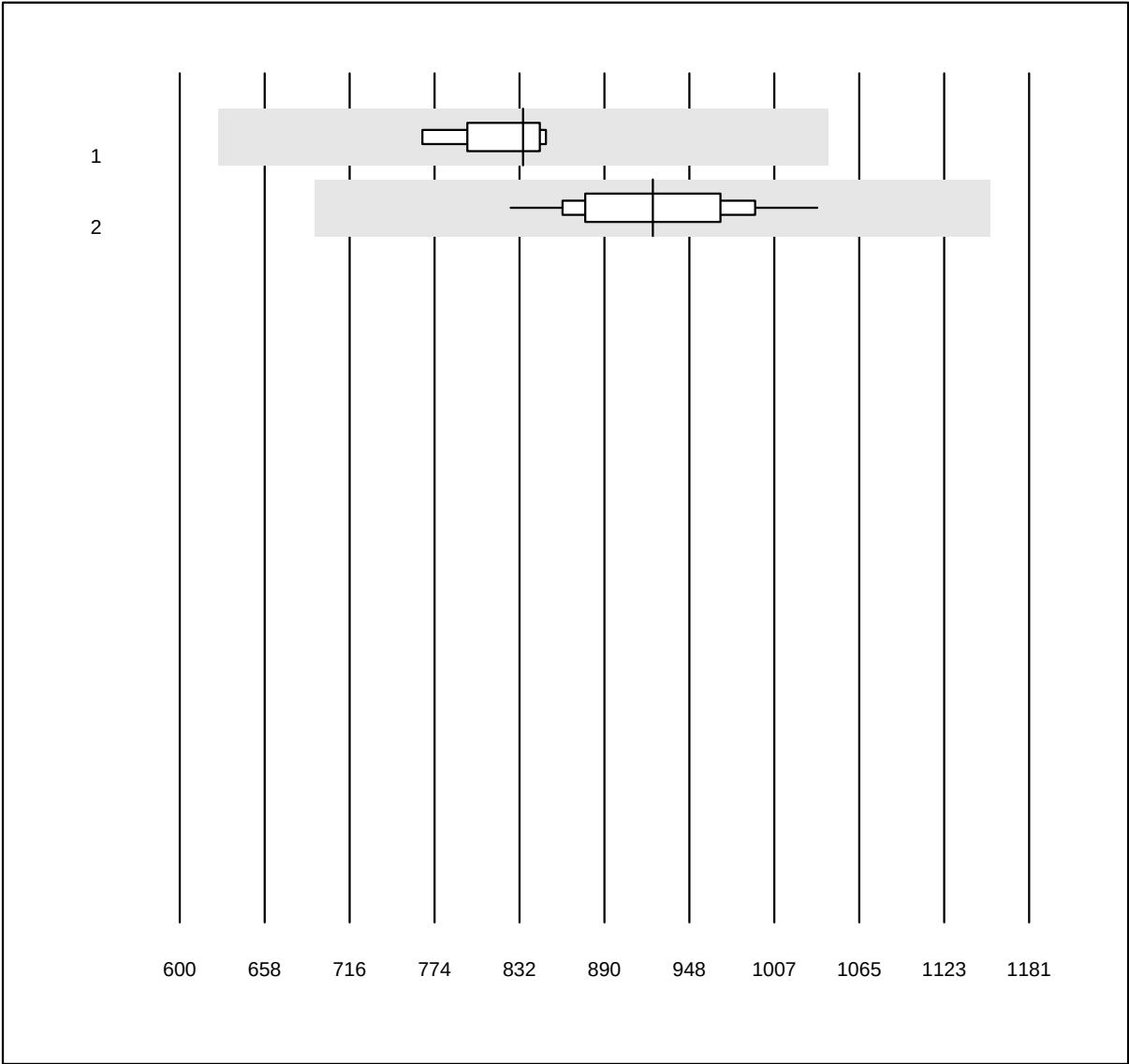


MQ Toleranz: 25%

Insulina (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	835	3.3	e
2 Roche	20	100.0	0.0	0.0	924	5.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ormone luteinizzante

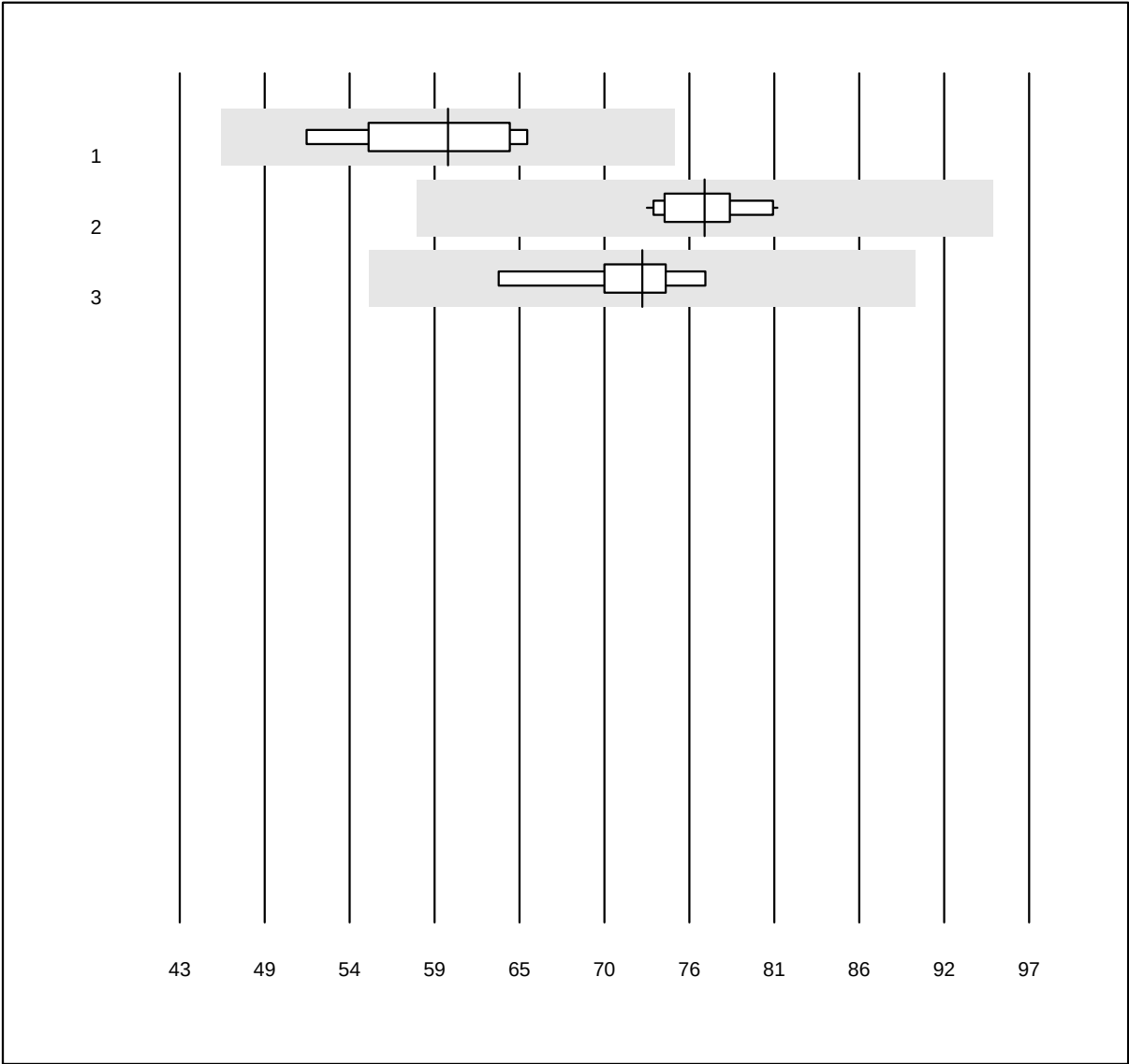


QUALAB Toleranz: 24%

Ormone luteinizzante (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	60.1	8.0	e*
2 Roche	16	100.0	0.0	0.0	76.4	3.4	e
3 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	72.4	5.1	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Progesterone

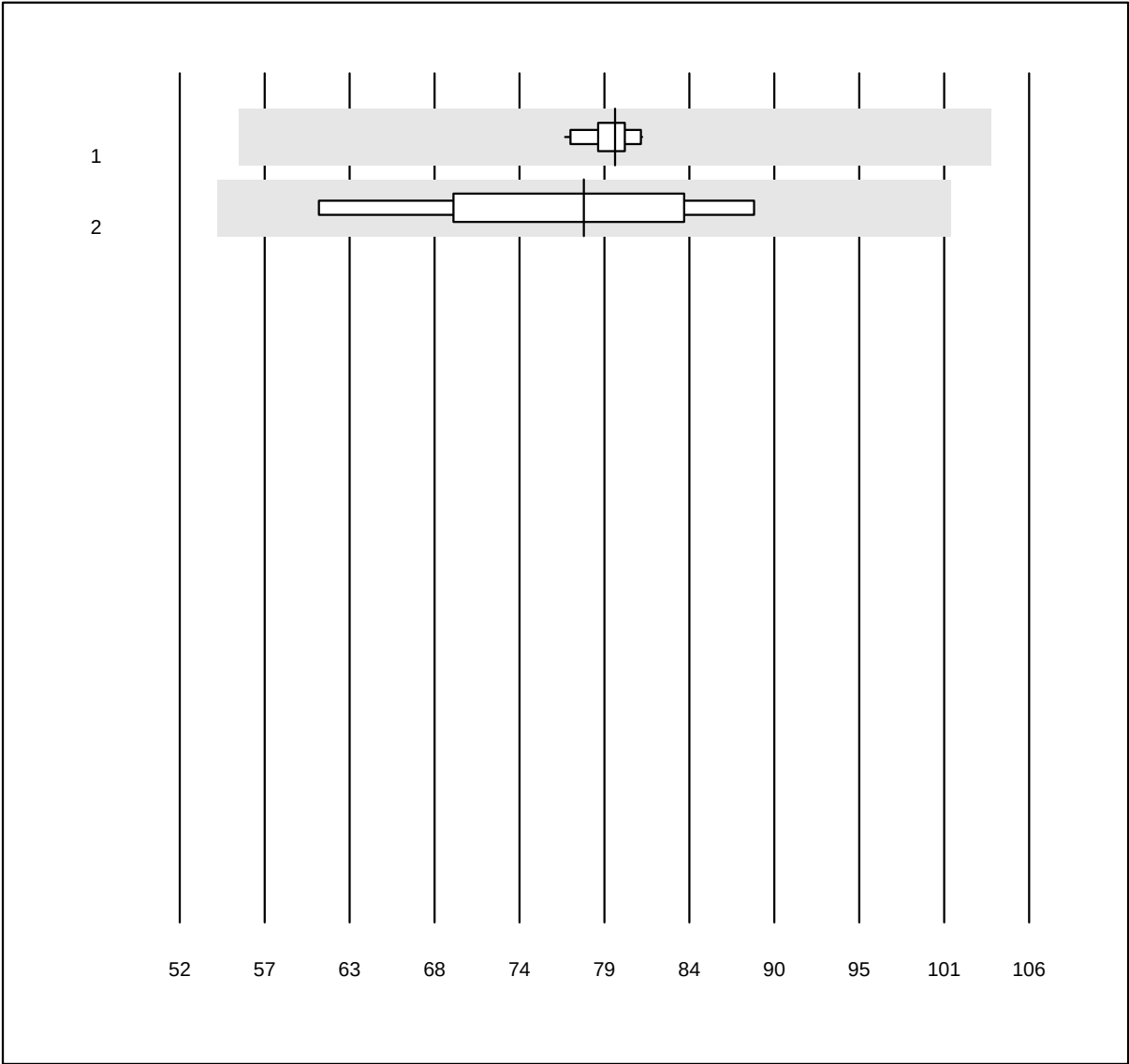


MQ Toleranz: 30%

Progesterone (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	11	100.0	0.0	0.0	79.7	1.7	e
2 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	77.7	10.7	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Prolattina (PRL)

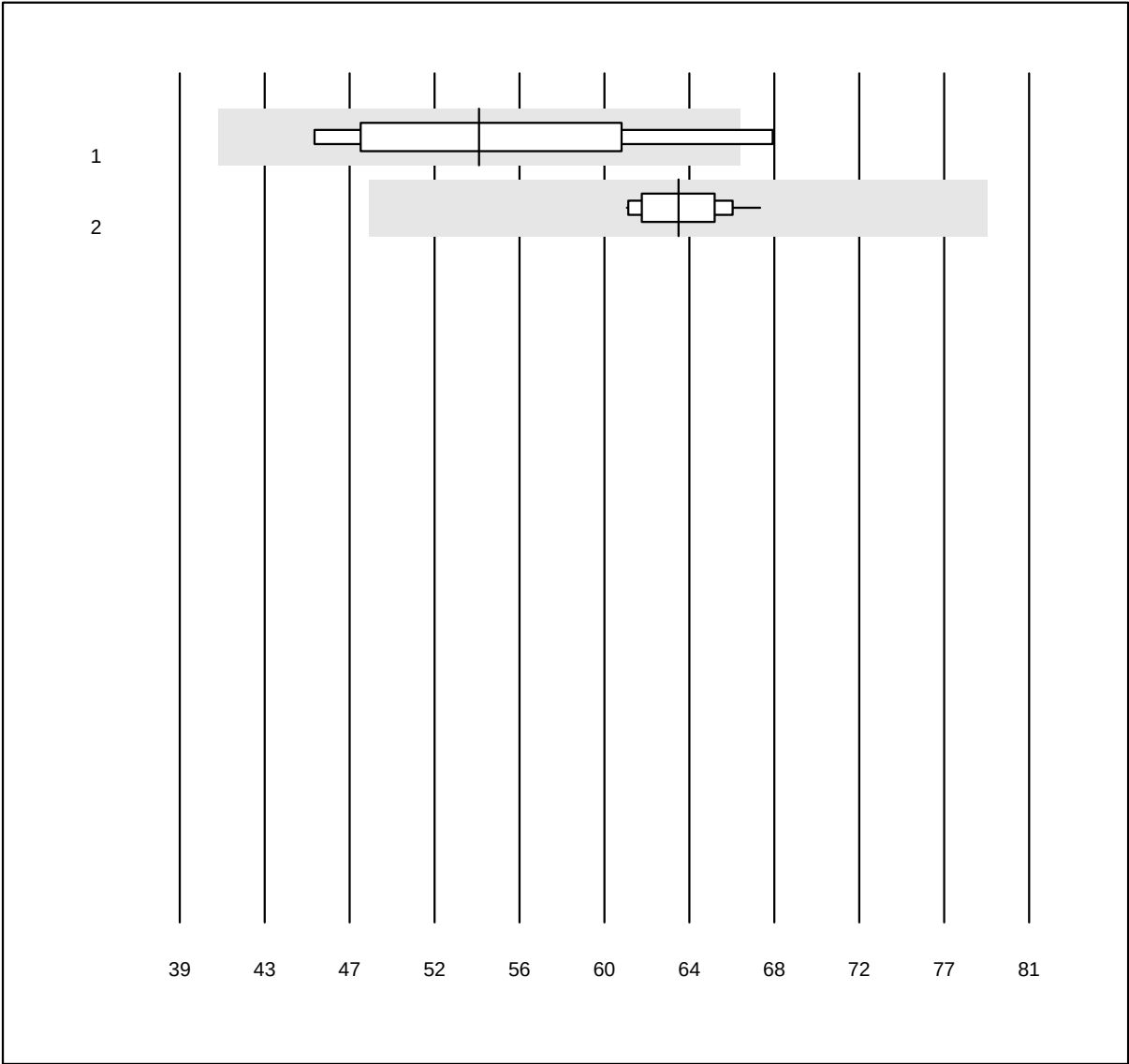


QUALAB Toleranz: 24%

Prolattina (PRL) (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	53.8	13.1	d*
2 Cobas/Roche	17	100.0	0.0	0.0	63.7	3.1	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

SHBG

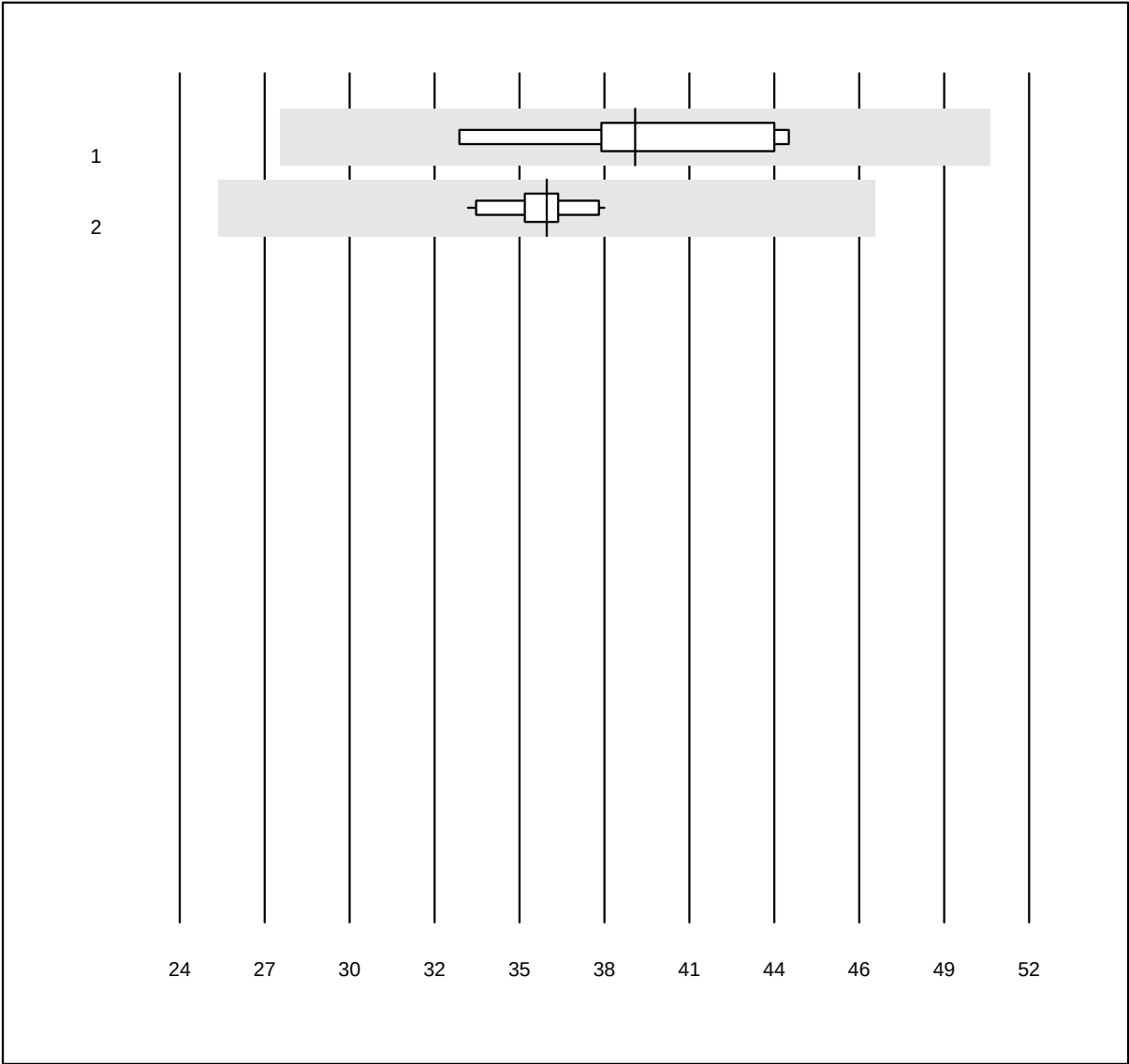


MQ Toleranz: 30%

SHBG (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	39.0	8.8	e
2 Roche	18	100.0	0.0	0.0	36.1	3.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IGF-1

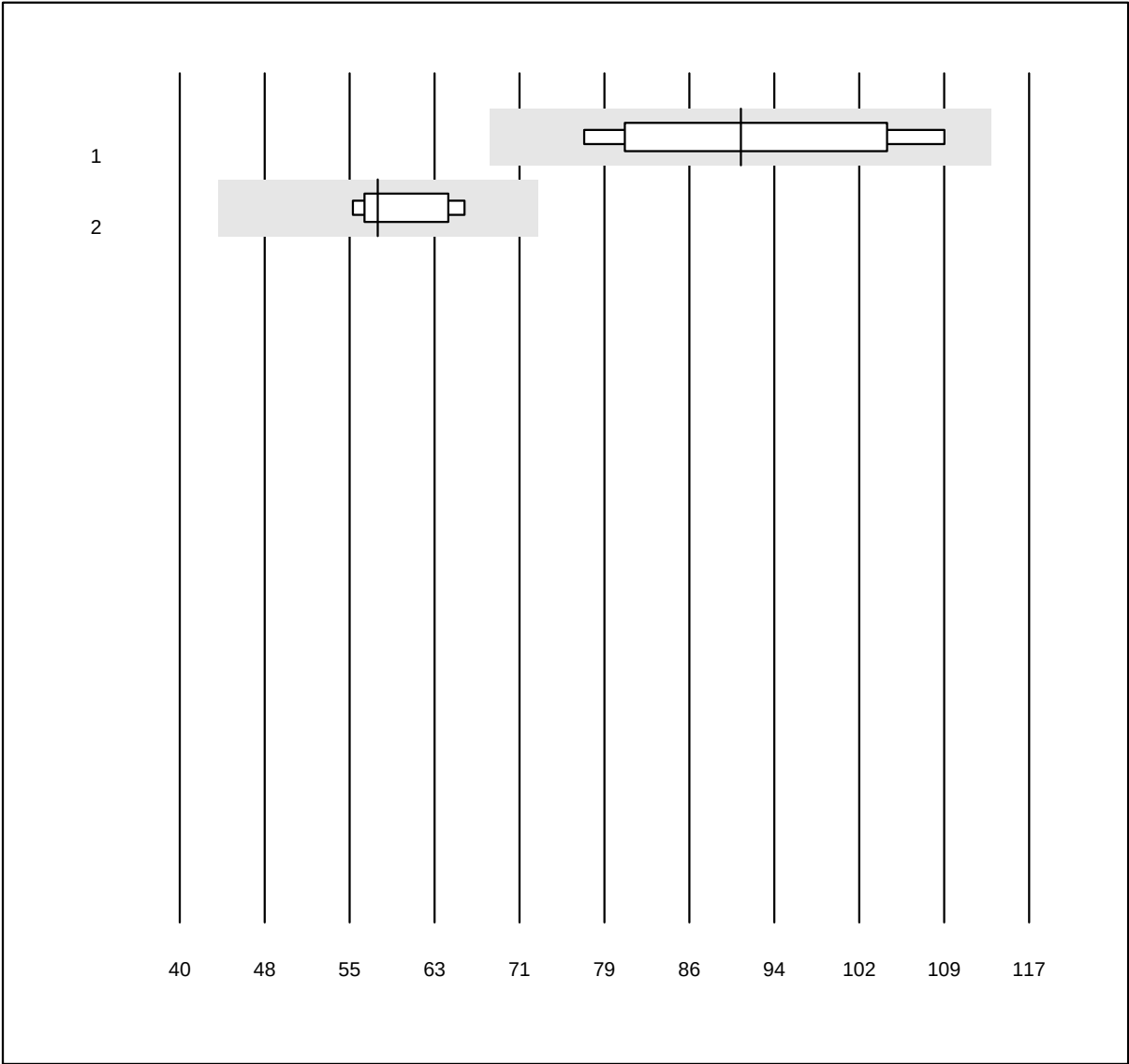


MQ Toleranz: 25%

IGF-1 (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Liaison	8	100.0	0.0	0.0	91	13.1	e*
2 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	58	6.7	e

Testosterone

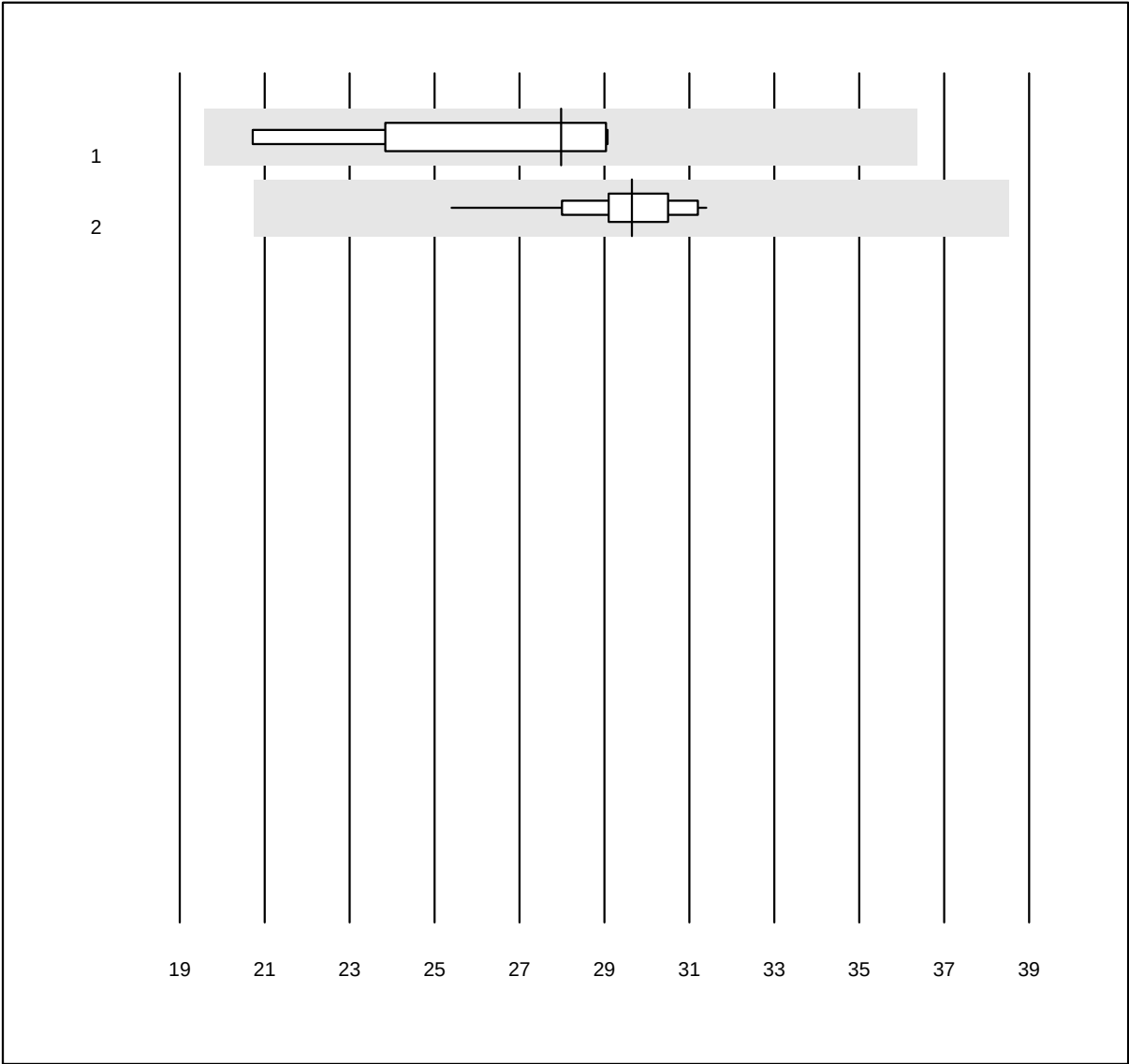


QUALAB Toleranz: 30%

Testosterone (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	28.0	10.9	e*
2 Roche	19	100.0	0.0	0.0	29.6	4.6	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Testosterone libero

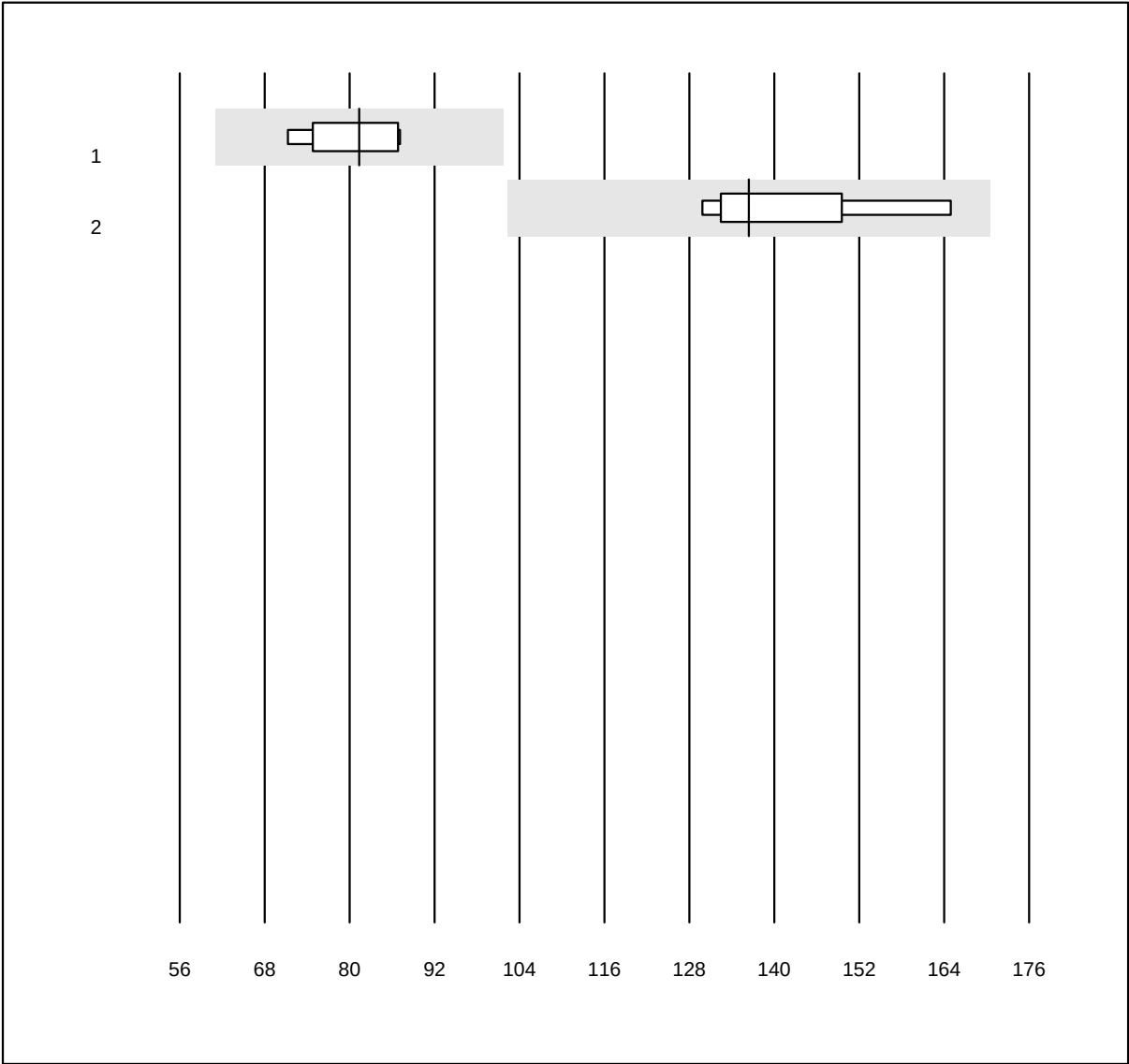


MQ Toleranz: 25%

Testosterone libero (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 IDS	5	100.0	0.0	0.0	81.4	7.6	e*
2 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	136.4	7.8	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

T3

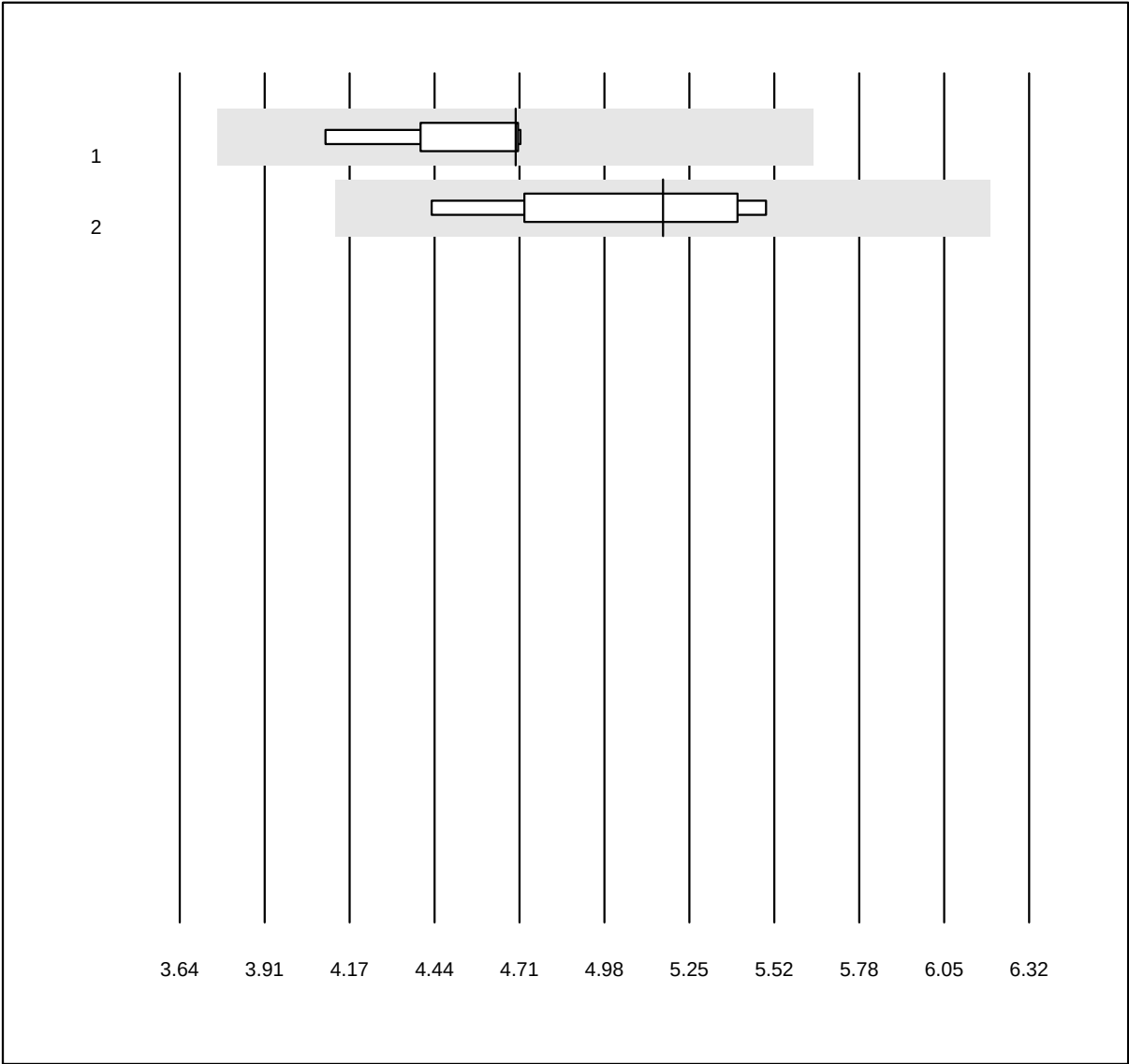


MQ Toleranz: 20%

T3 (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	4.7	4.4	e
2 AFIAS	4	100.0	0.0	0.0	5.2	7.0	e*

FT3

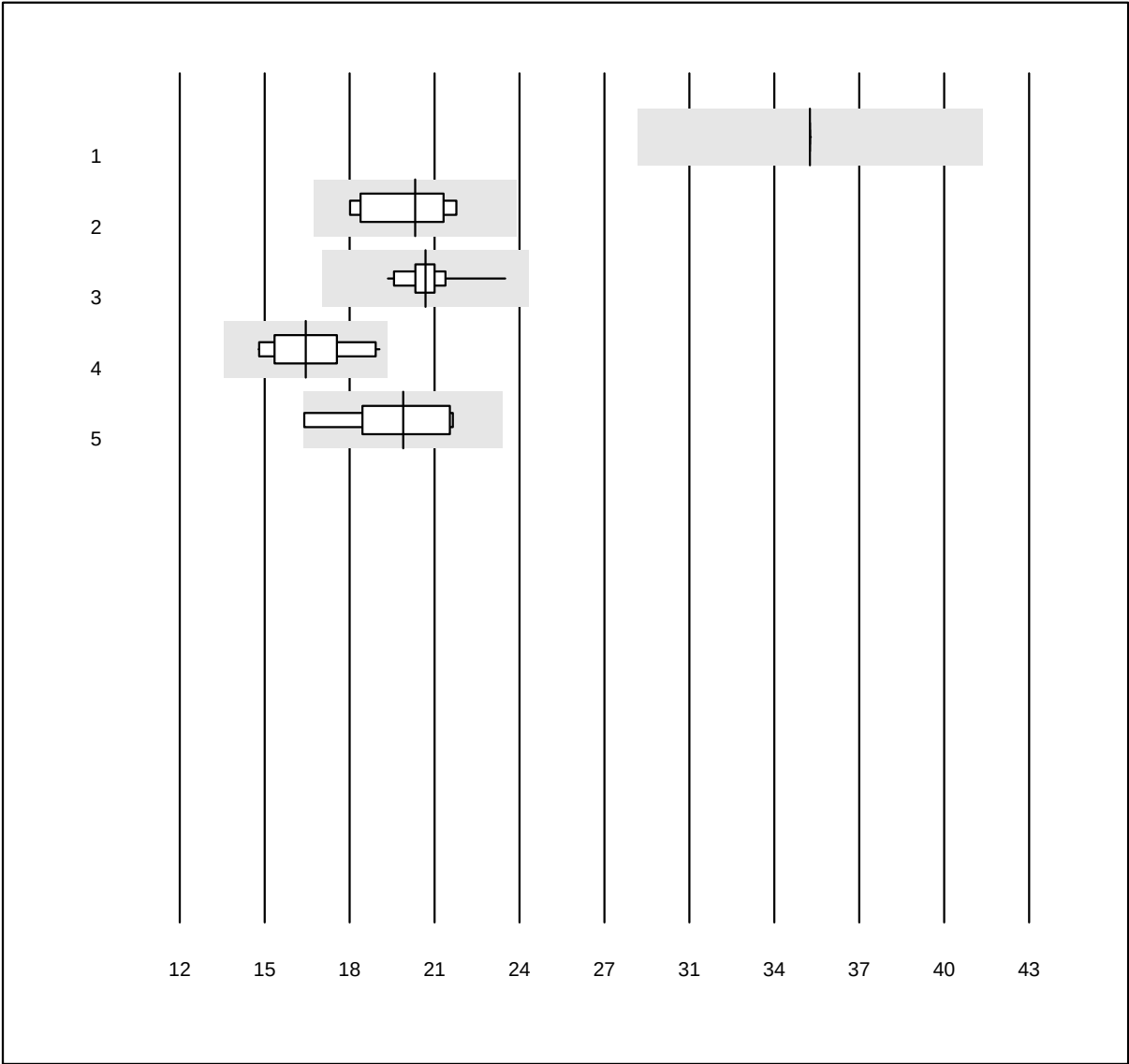


QUALAB Toleranz: 18%

FT3 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	35.0	0.0	e
2 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	20.6	7.5	e*
3 Roche	31	100.0	0.0	0.0	21.0	4.2	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	16.6	8.2	e*
5 VIDAS	7	100.0	0.0	0.0	20.2	9.4	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

T4

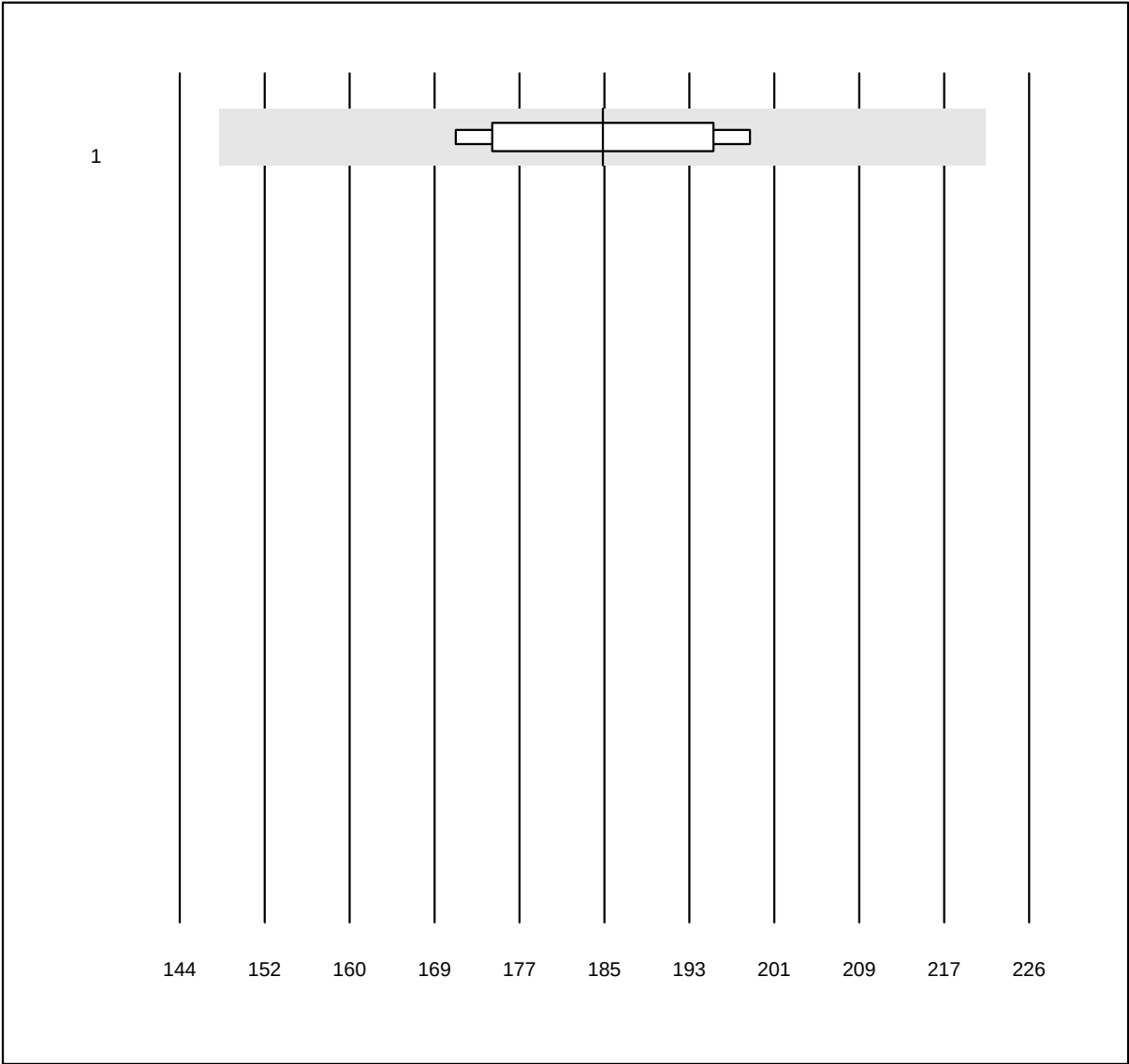


MQ Toleranz: 20%

T4 (nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Abbott	4	100.0	0.0	0.0	185	6.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

FT4

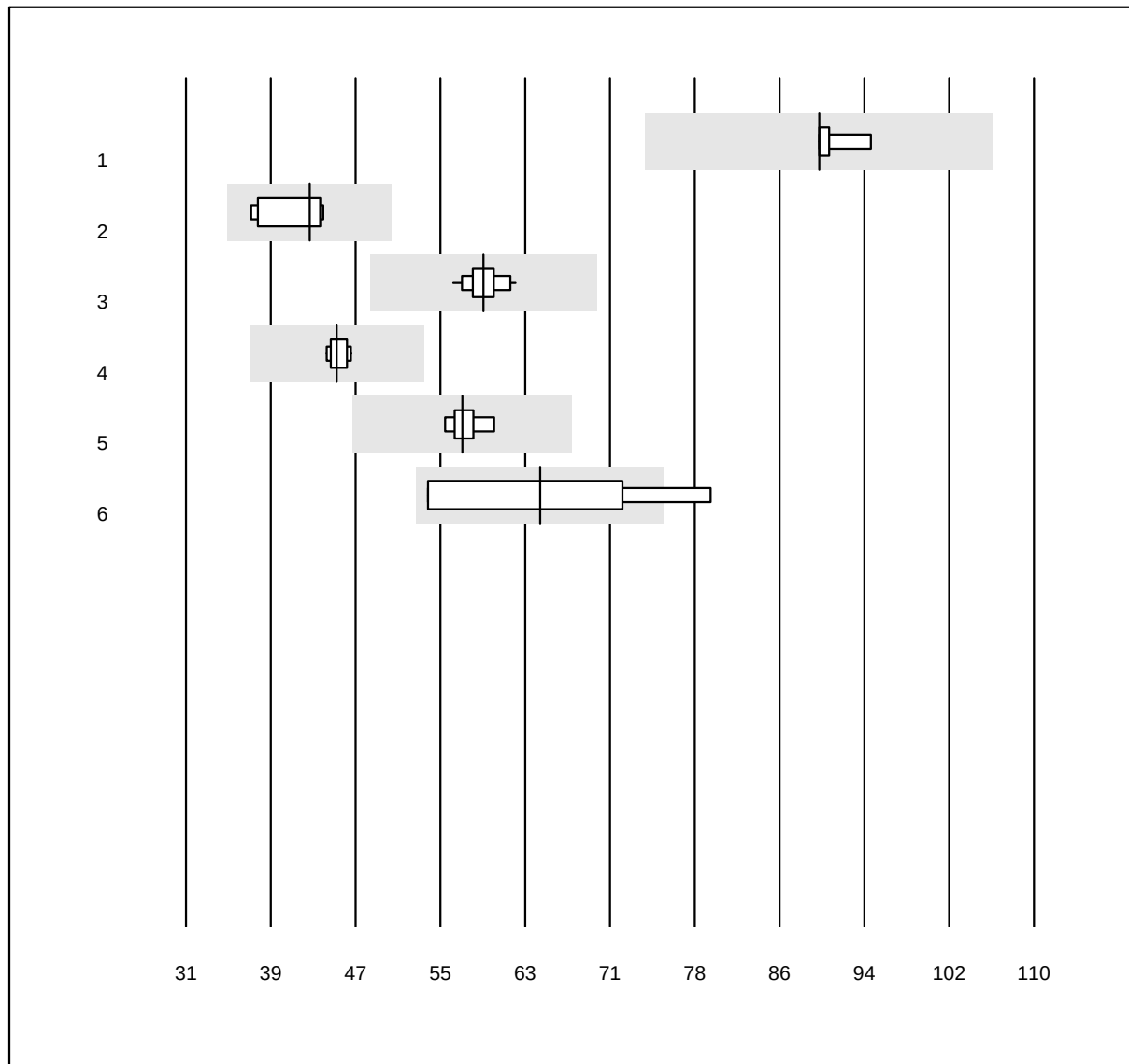


QUALAB Toleranz: 18%

FT4 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Vitros	6	100.0	0.0	0.0	90.0	1.7	e
2 Abbott	7	85.7	0.0	14.3	42.5	6.9	e*
3 Roche	32	100.0	0.0	0.0	58.7	2.6	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	45.0	1.8	e
5 VIDAS	8	100.0	0.0	0.0	56.8	2.3	e
6 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	64.0	16.2	a*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

TSH

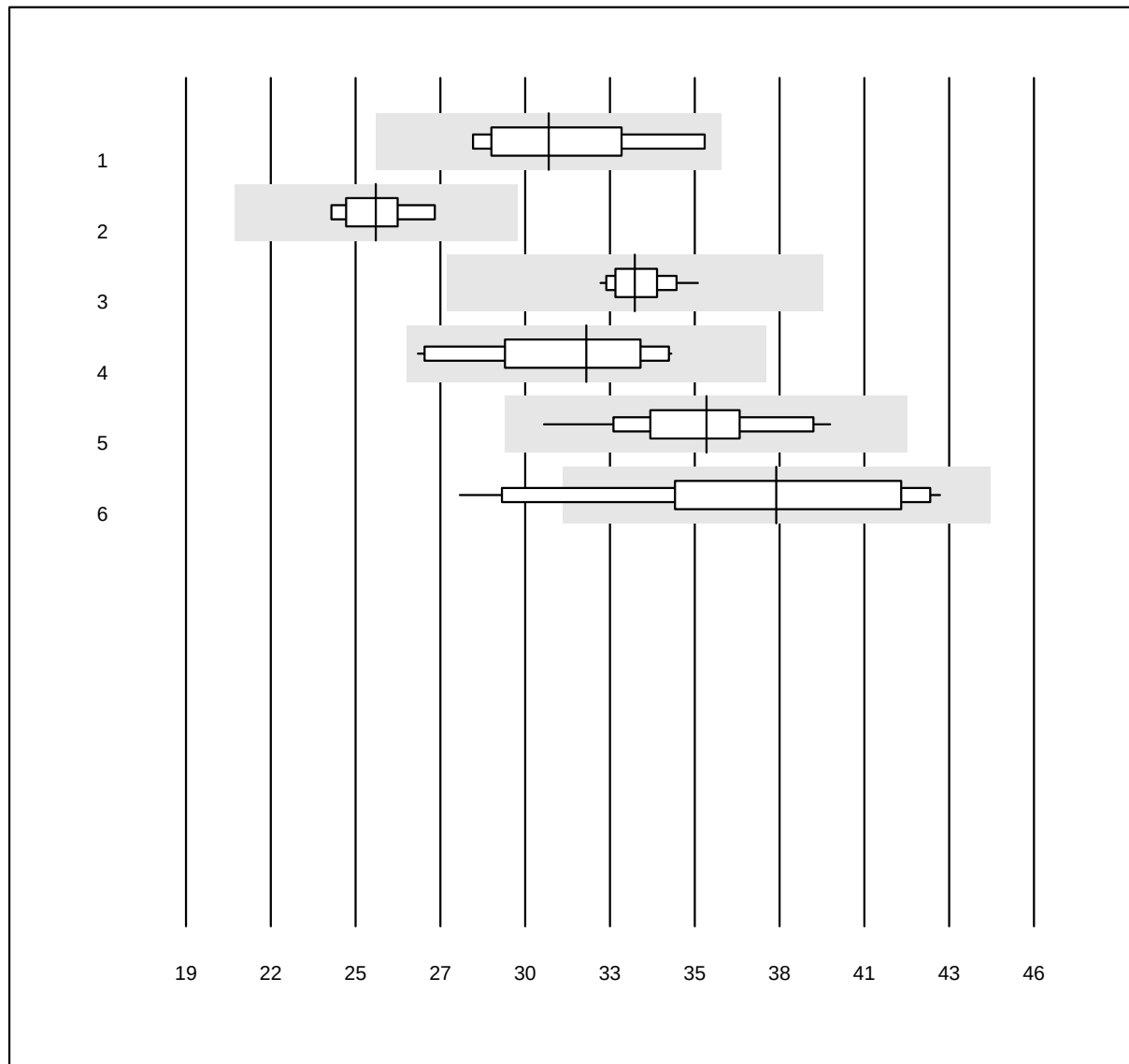


QUALAB Toleranz: 18%

TSH (mU/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Vitros	5	100.0	0.0	0.0	30.55	7.6	e*
2 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	25.04	4.2	e
3 Roche	38	100.0	0.0	0.0	33.29	2.5	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	31.75	8.3	e*
5 VIDAS	16	100.0	0.0	0.0	35.57	6.4	e
6 AFIAS	12	91.7	8.3	0.0	37.80	12.4	e*

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Troponina T CR

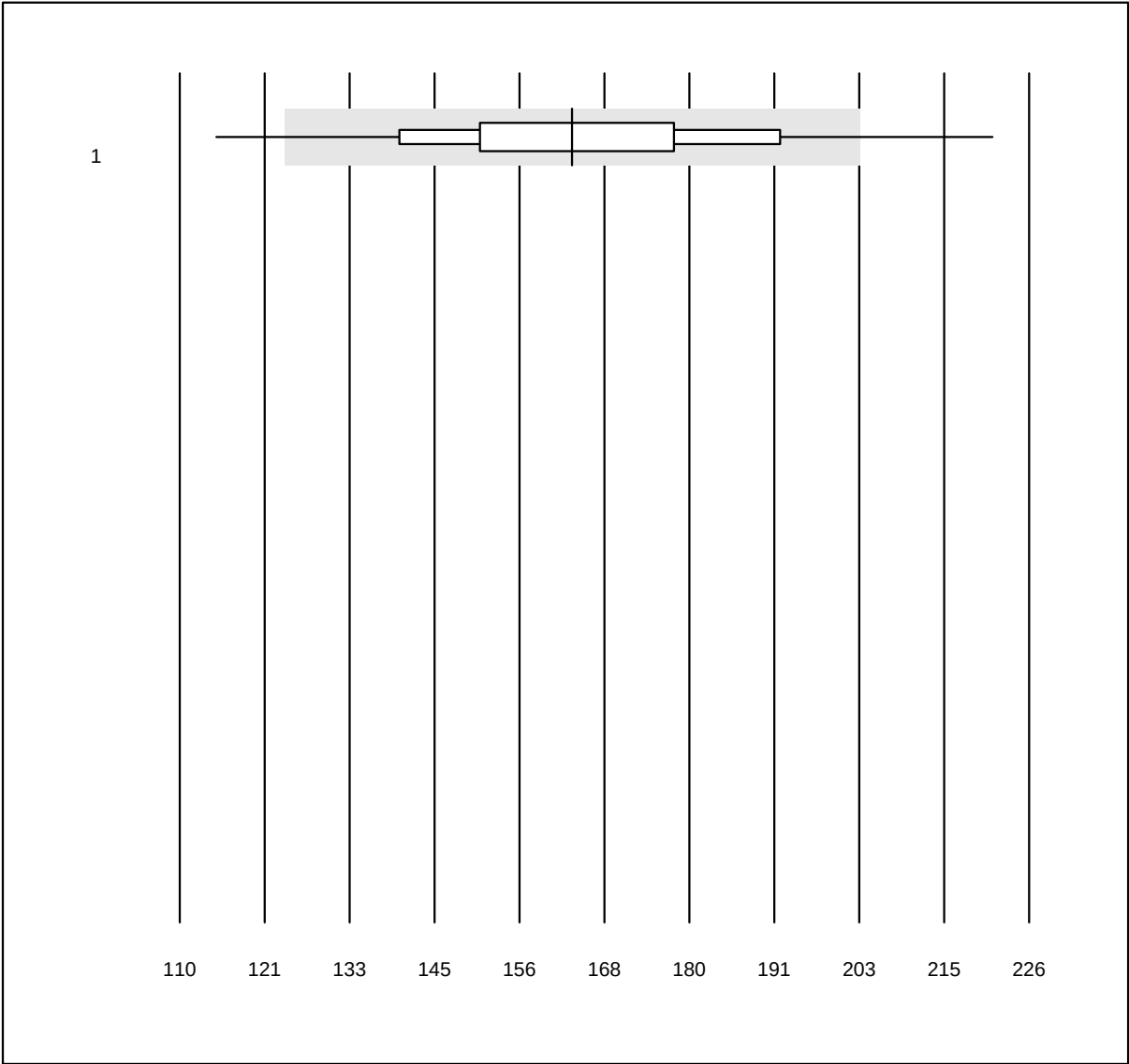


MQ Toleranz: 24%

Troponina T CR (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas h 232	229	90.4	7.4	2.2	163.58	12.4	e

NT-proBNP CR

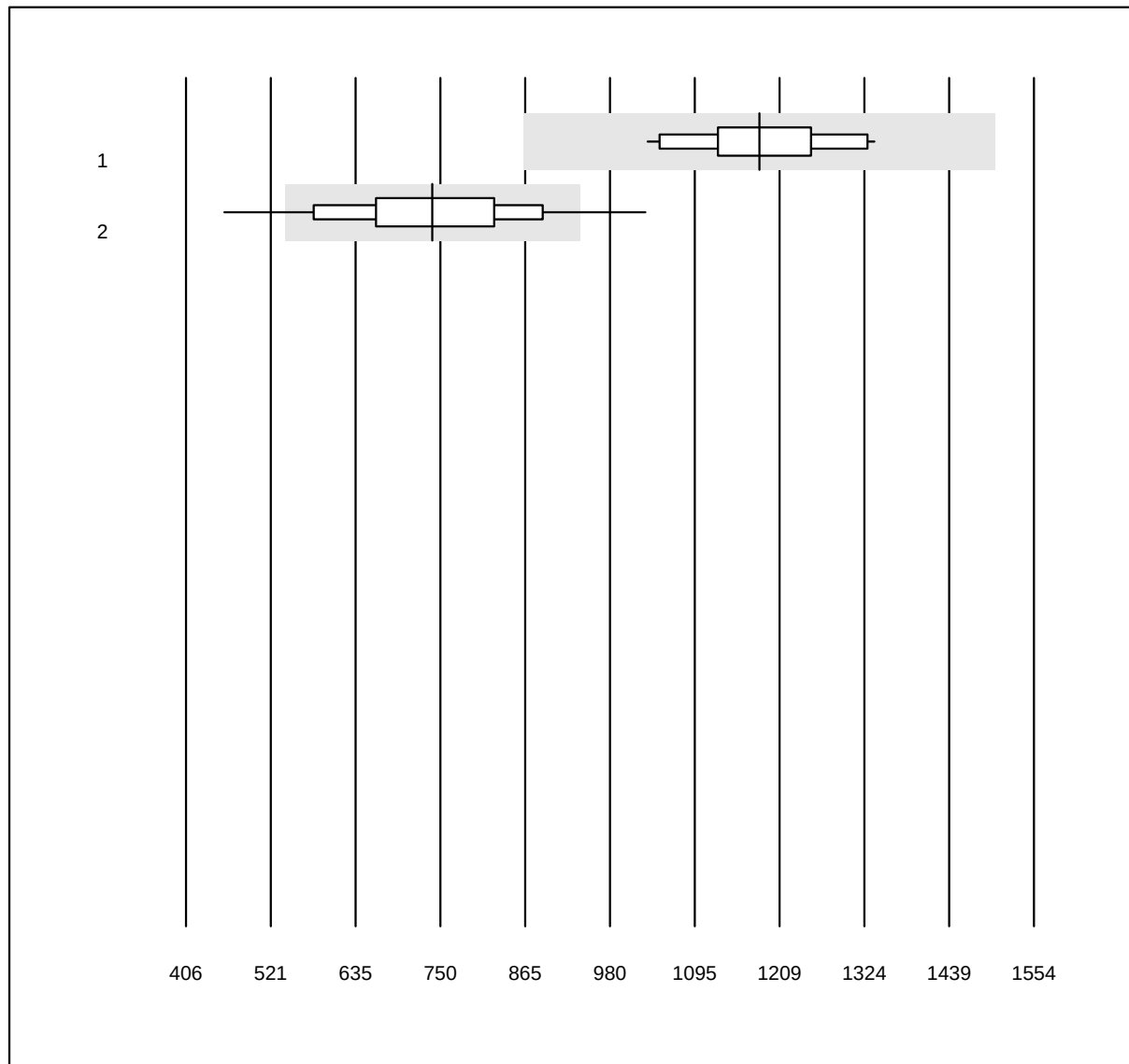


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP CR (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Lumira Dx	13	92.3	0.0	7.7	1182	7.4	e
2 Cobas h 232	278	88.5	9.4	2.2	739	15.7	e

D-Dimeri CR

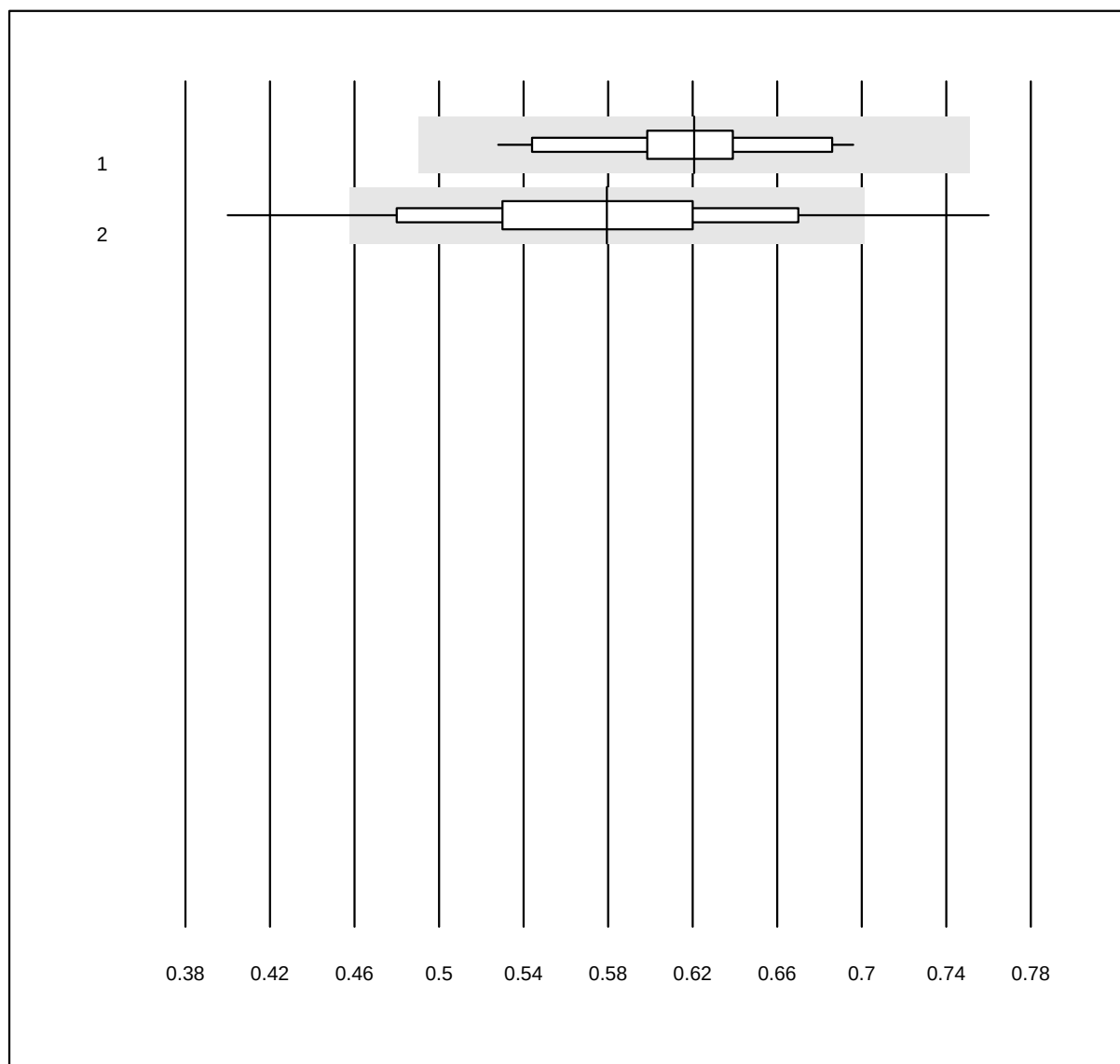


QUALAB Toleranz: 21%

D-Dimeri CR (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Lumira Dx	15	93.3	0.0	6.7	0.62	7.0	e
2 Cobas h 232	506	90.9	7.5	1.6	0.58	11.8	e

PO2 CCA

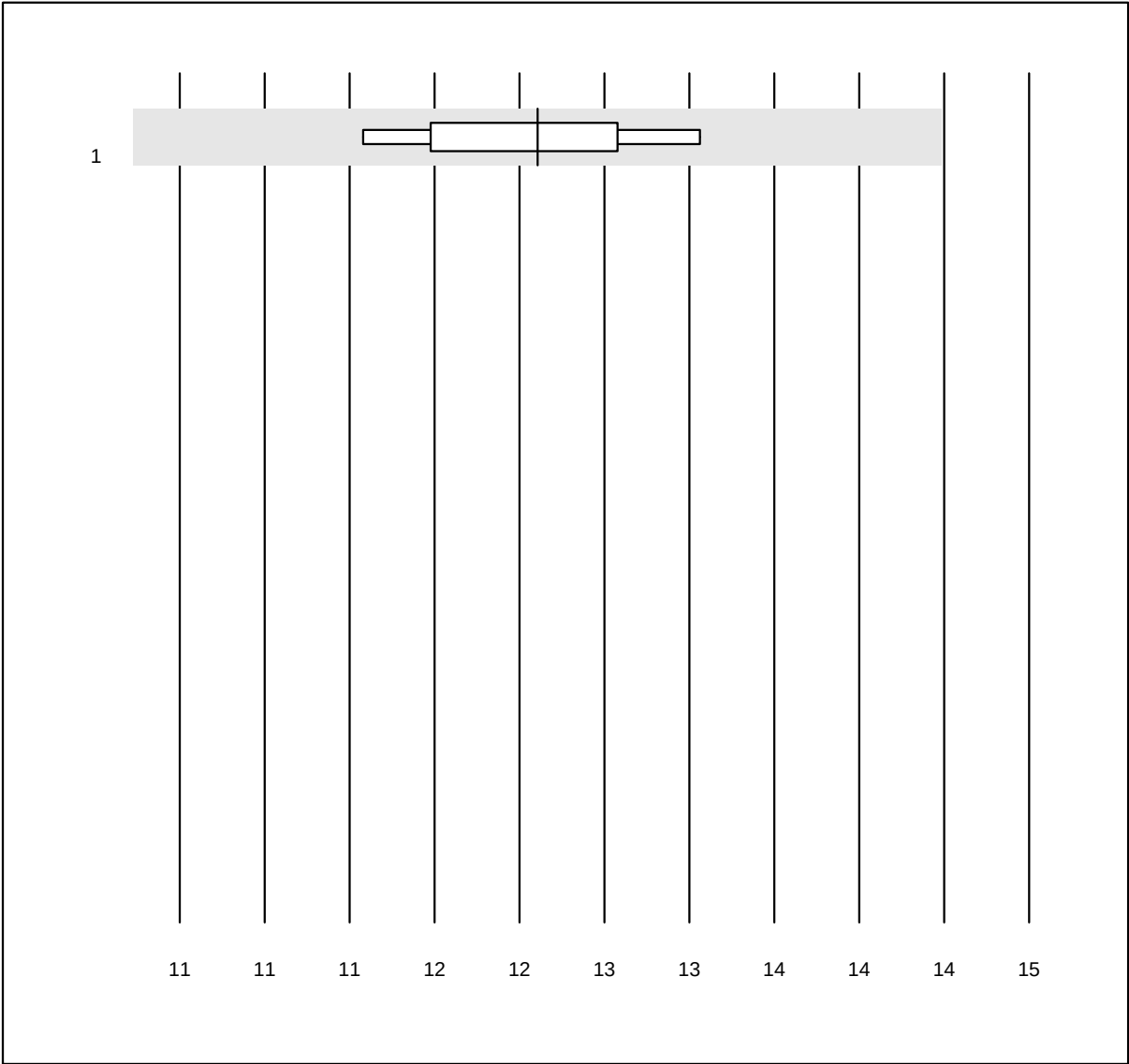


QUALAB Toleranz: 15%

PO2 CCA (kPa)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	12.69	4.1	e

PCO2 CCA

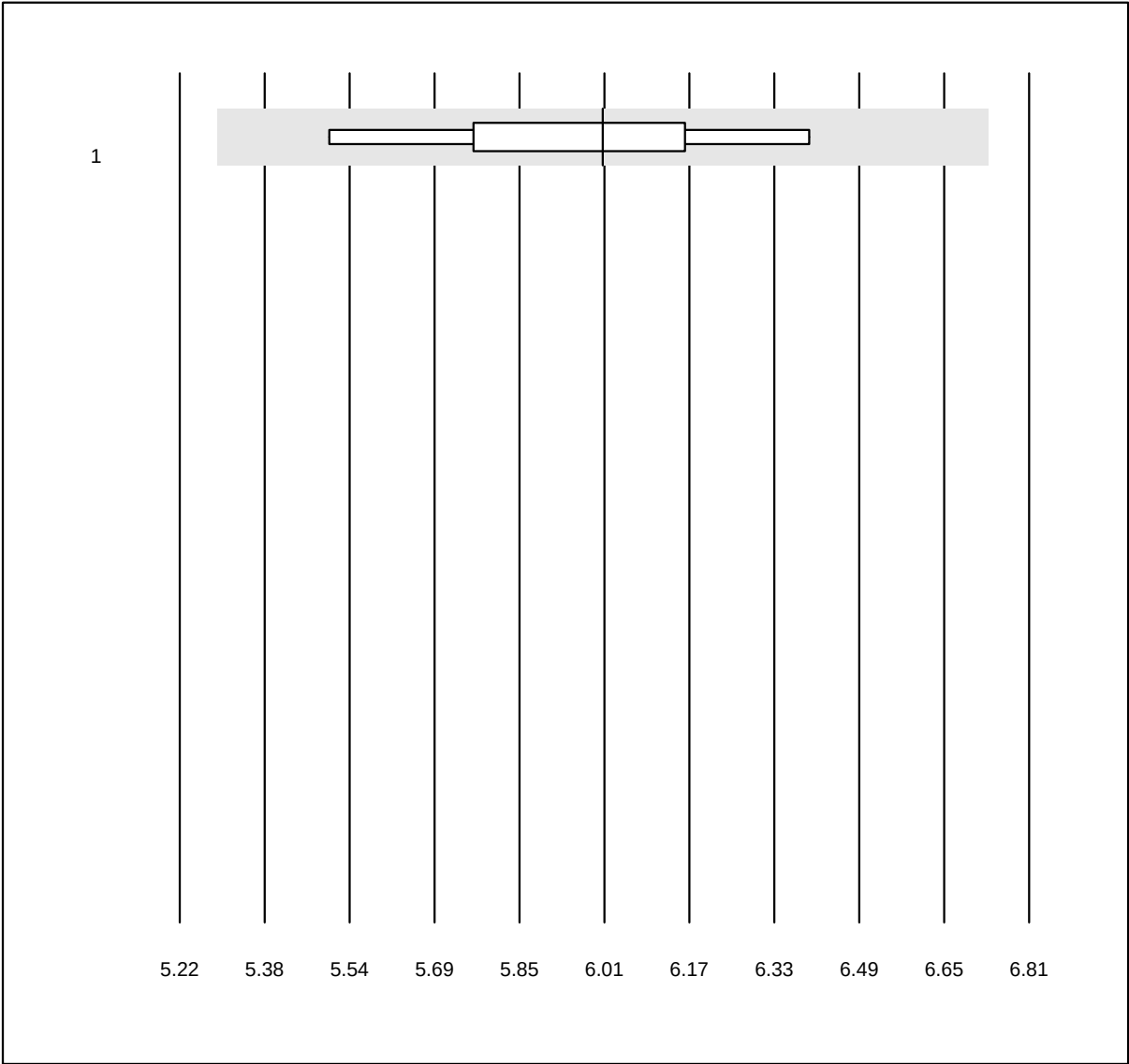


QUALAB Toleranz: 12%

PCO2 CCA (kPa)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OPTI CCA	9	100.0	0.0	0.0	6.01	4.8	e*

pH CCA

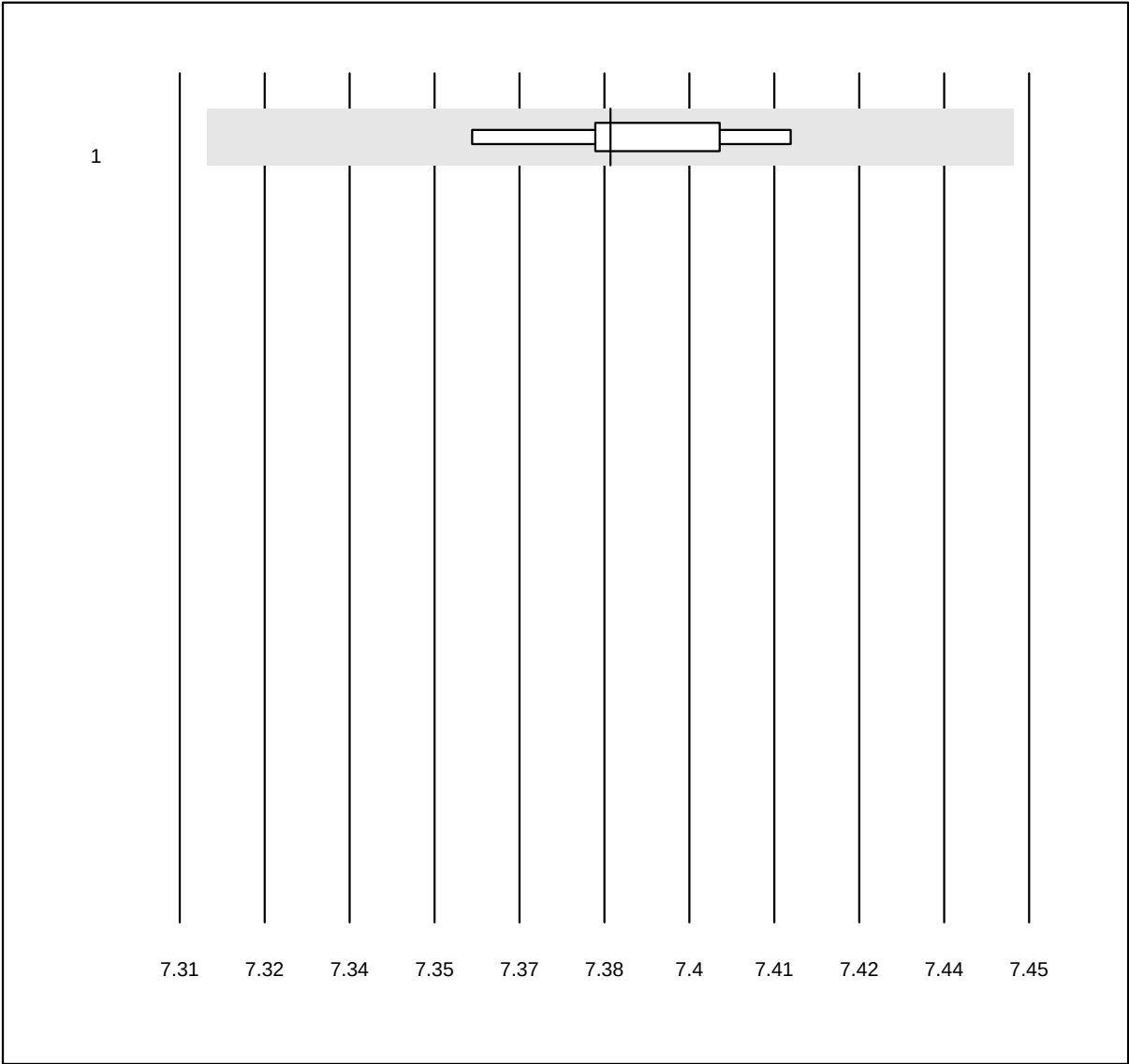


QUALAB Toleranz: 0%

pH CCA ()

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OPTI CCA	8	100.0	0.0	0.0	7.38	0.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sodio CCA

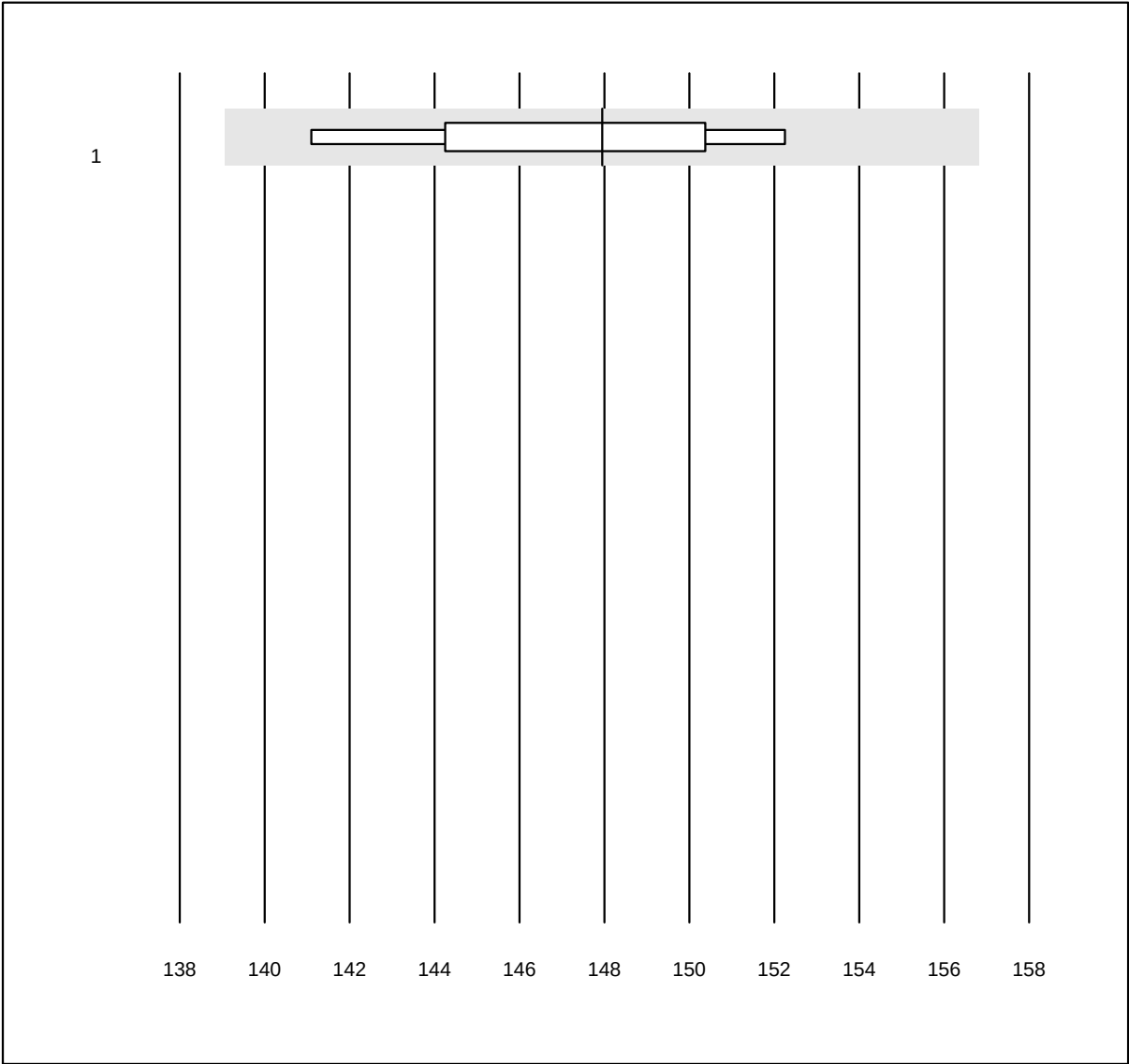


QUALAB Toleranz: 6%

Sodio CCA (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OPTI CCA	4	100.0	0.0	0.0	147.9	2.2	e*

Potassio CCA

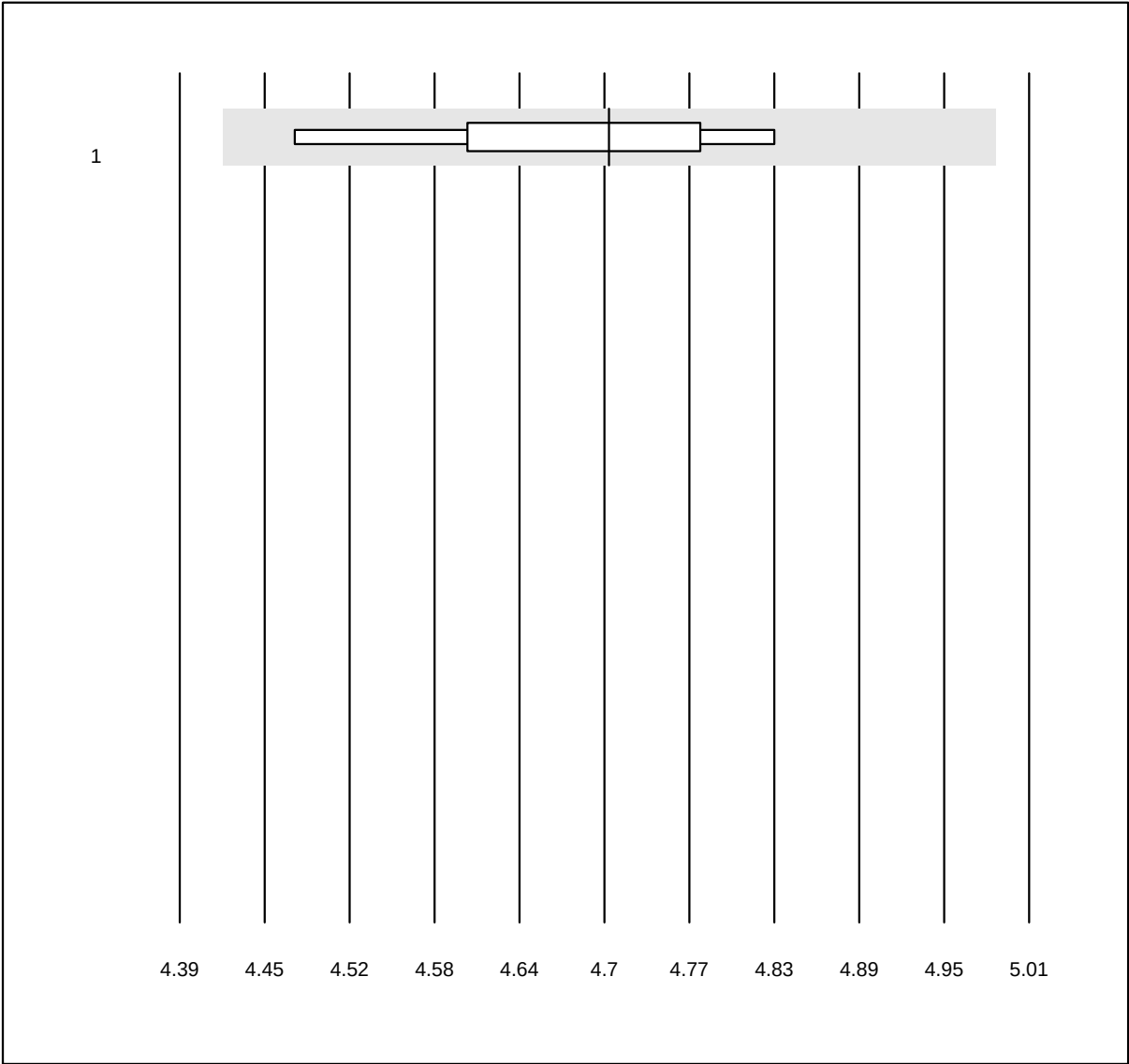


QUALAB Toleranz: 6%

Potassio CCA (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OPTI CCA	5	100.0	0.0	0.0	4.7	2.2	e*

Ferritina

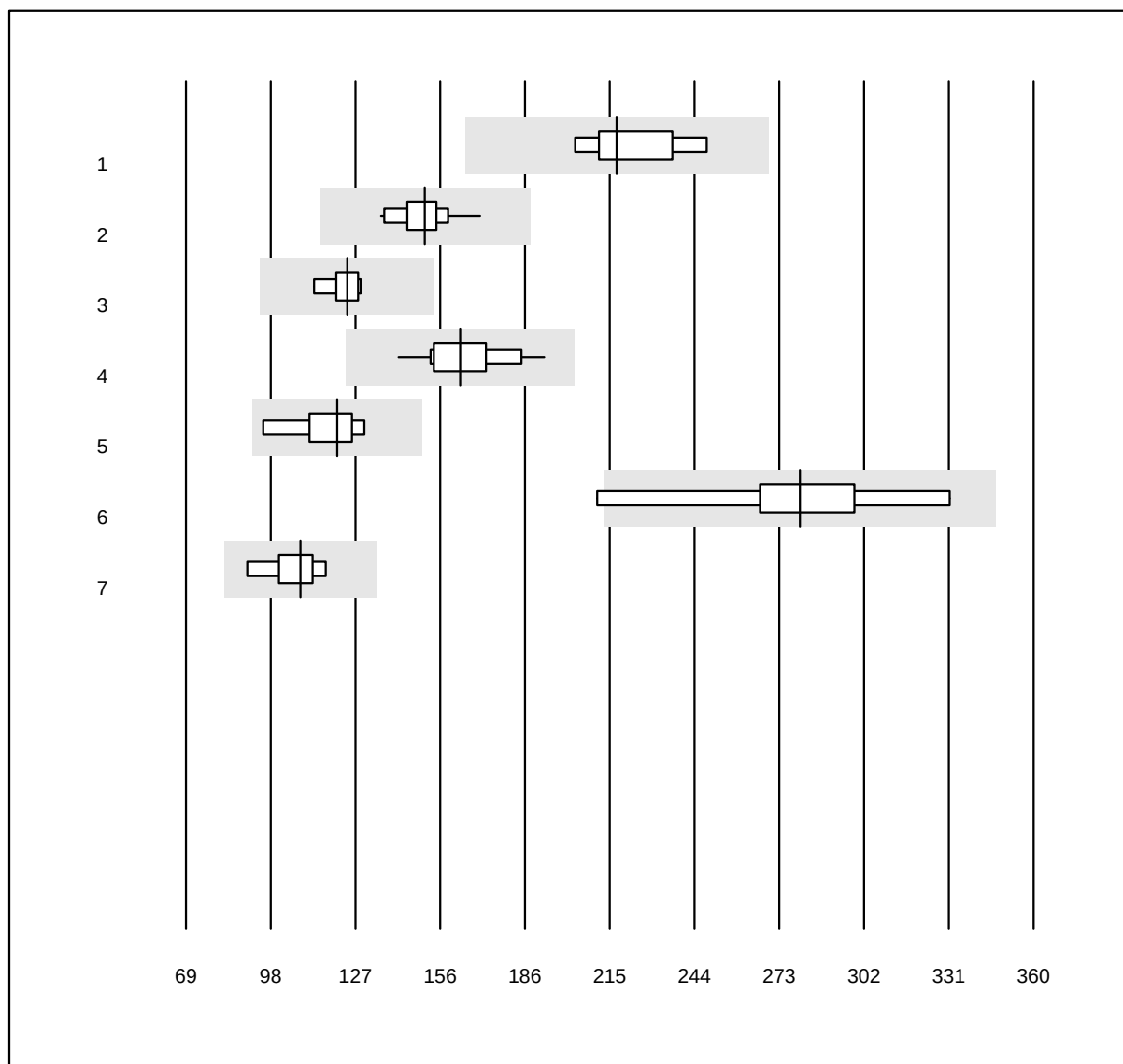


QUALAB Toleranz: 24%

Ferritina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	216.87	6.7	e
2 Roche	40	100.0	0.0	0.0	150.99	5.4	e
3 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	124.40	4.2	e
4 AFIAS	21	100.0	0.0	0.0	163.14	7.5	e
5 Mini Vidas	8	100.0	0.0	0.0	120.97	9.1	e*
6 RapidReader Cube Reader	9	88.9	11.1	0.0	279.80	11.9	e*
7 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	108.33	6.9	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Acido folico

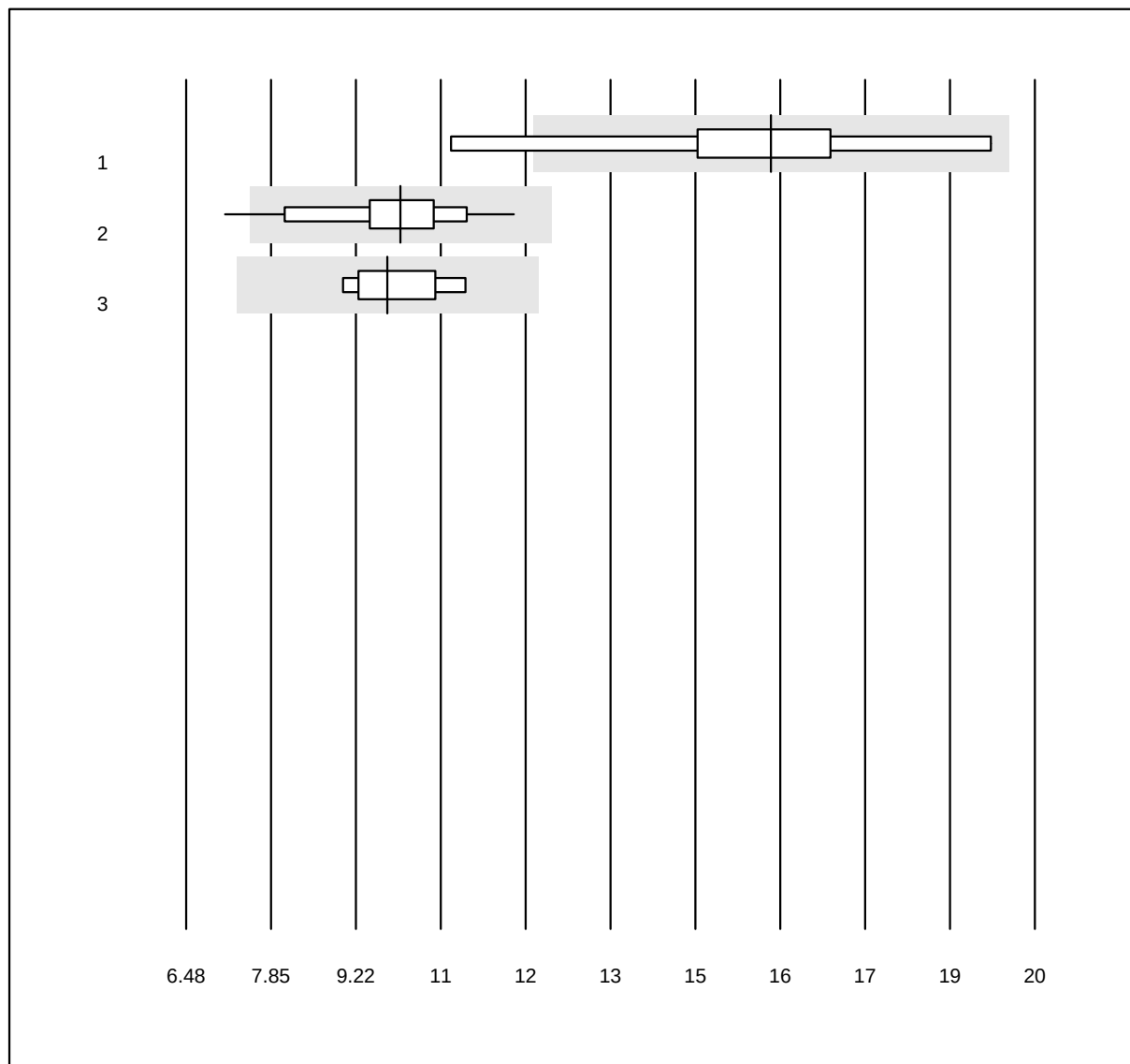


QUALAB Toleranz: 24%

Acido folico (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	9	88.9	11.1	0.0	15.80	14.9	e*
2 Roche	24	95.8	4.2	0.0	9.89	10.4	e
3 Siemens	8	100.0	0.0	0.0	9.69	6.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Vitamina B12

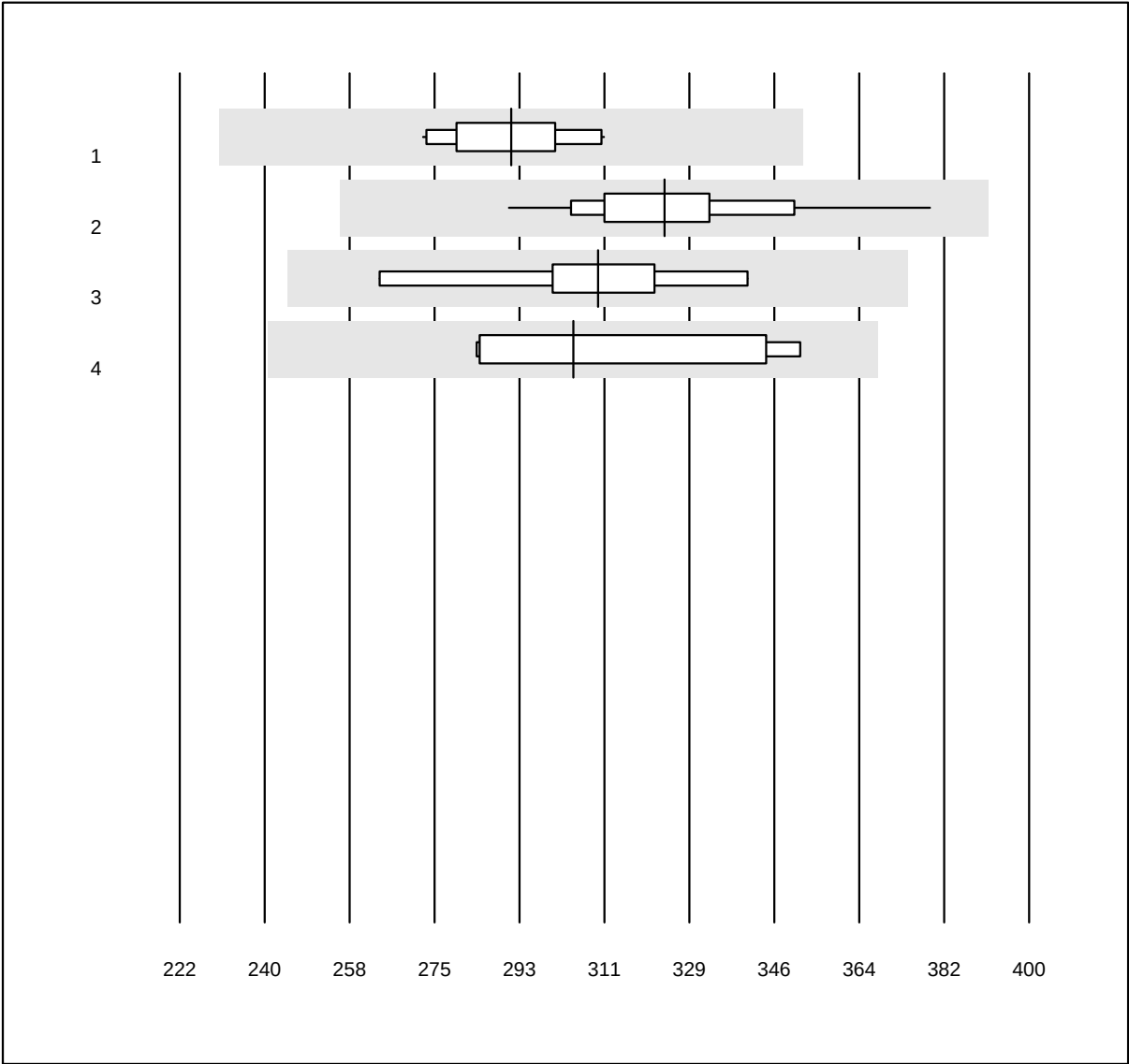


QUALAB Toleranz: 21%

Vitamina B12 (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	10	100.0	0.0	0.0	291.47	4.2	e
2 Roche	25	100.0	0.0	0.0	323.60	5.9	e
3 Siemens	9	100.0	0.0	0.0	309.67	6.9	e
4 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	304.50	9.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Holotranscobalamine

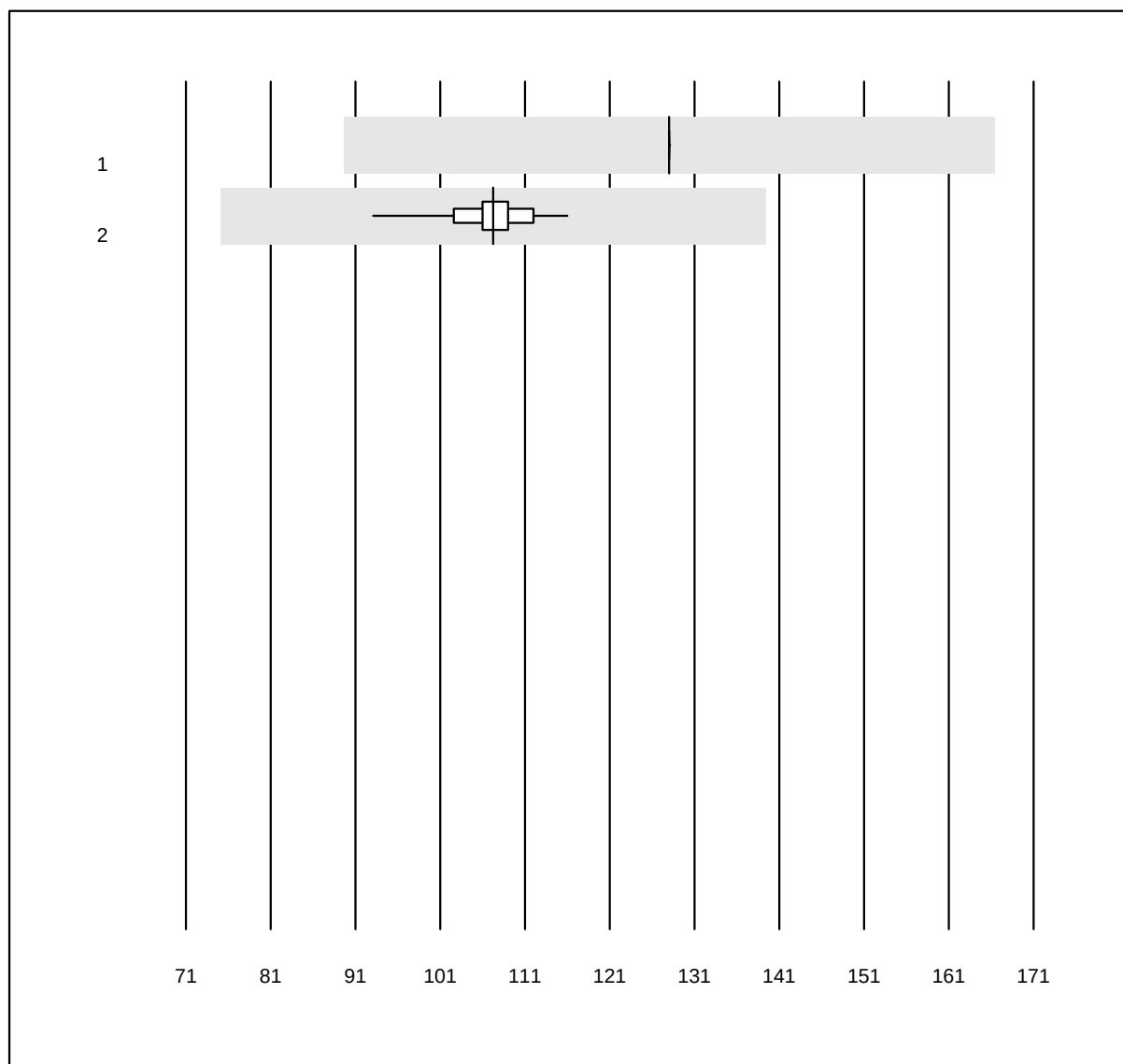


QUALAB Toleranz: 30%

Holotranscobalamine
(pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	9	100.0	0.0	0.0	128.0	0.0	e
2 Cobas	47	100.0	0.0	0.0	107.2	3.8	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Bilirubina diretta

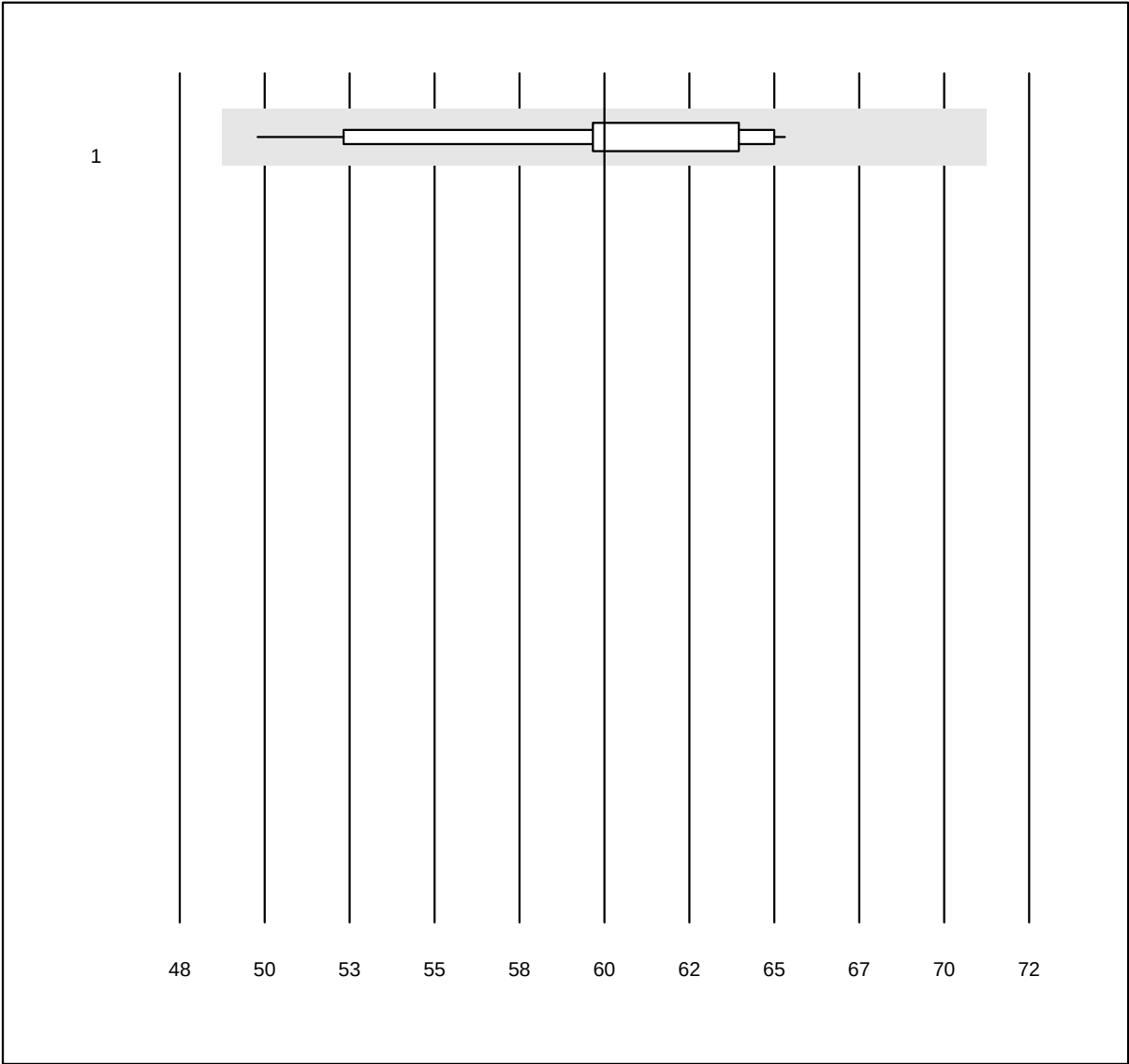


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubina diretta (µmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	22	100.0	0.0	0.0	60	6.7	a

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)


Bilirubina totale Neo

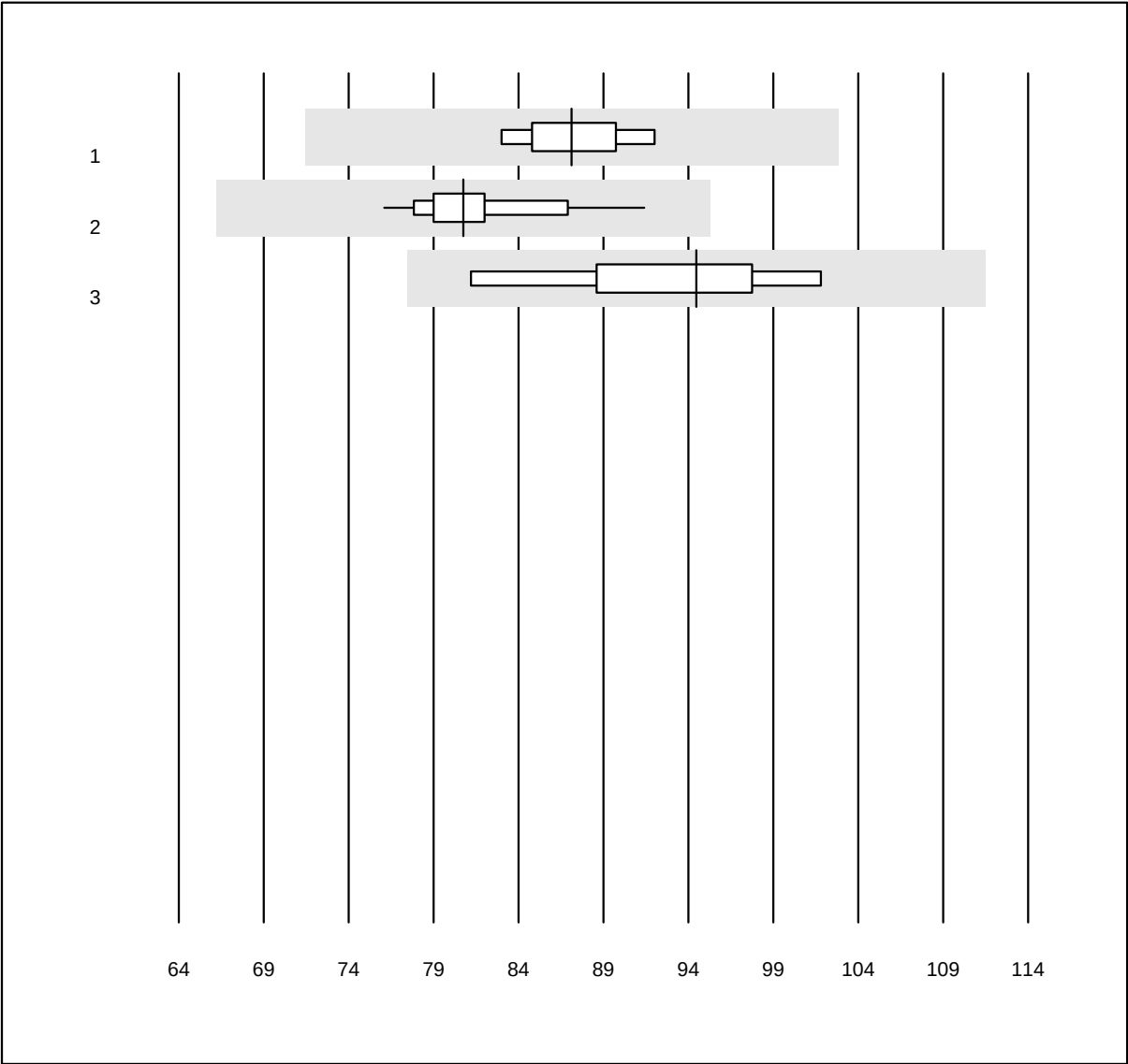

QUALAB Toleranz: 18%

		Bilirubina totale Neo (μmol/l)						
No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	87	3.1	e
2	Roche	15	100.0	0.0	0.0	81	4.2	e
3	Siemens	9	100.0	0.0	0.0	94	6.9	e*

Bilirubina neonatale

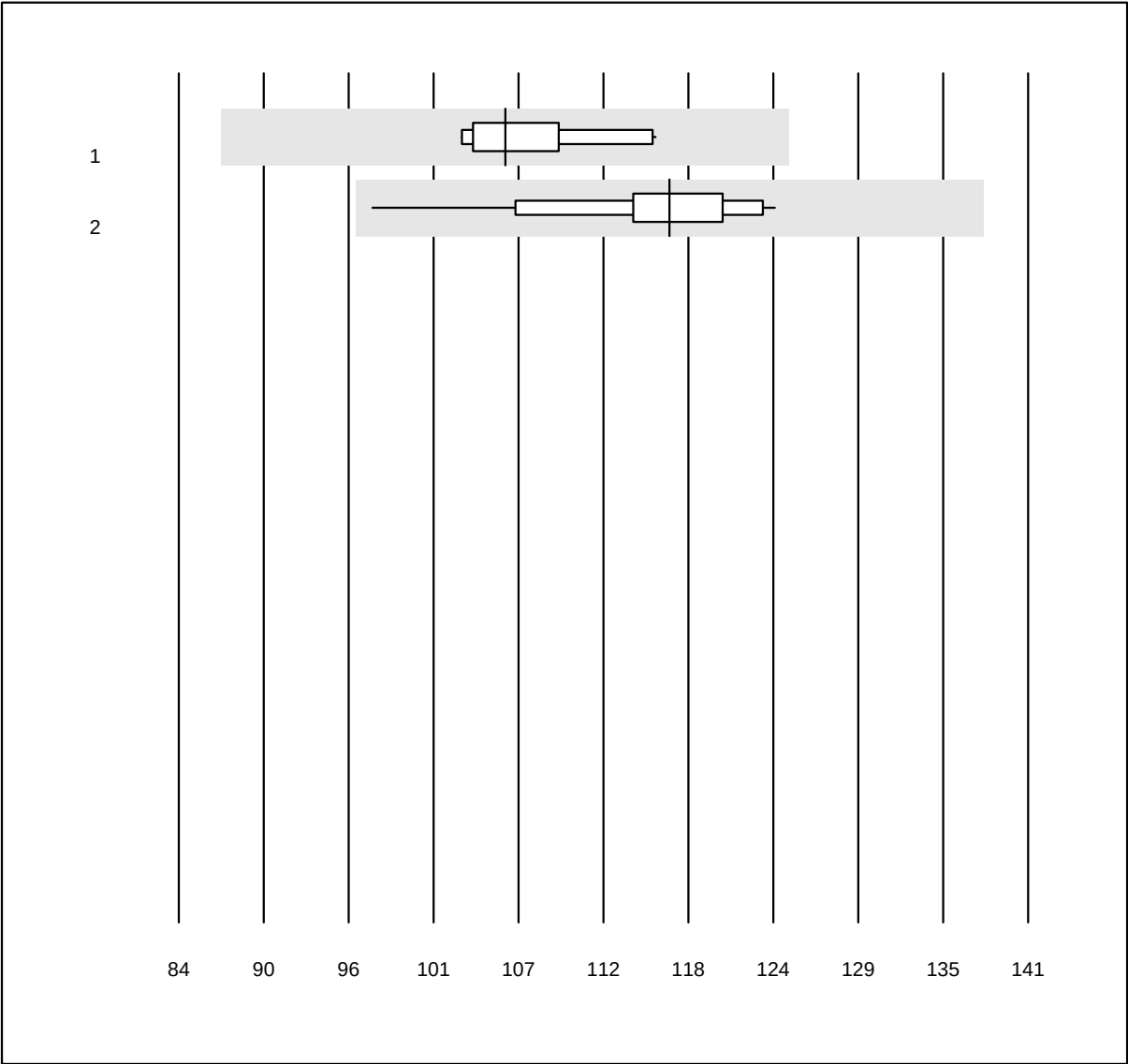


QUALAB Toleranz: 18%

Bilirubina neonatale (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 ABL700/800	10	100.0	0.0	0.0	106	4.4	e
2 altri metodi	17	100.0	0.0	0.0	117	5.6	e

AFP

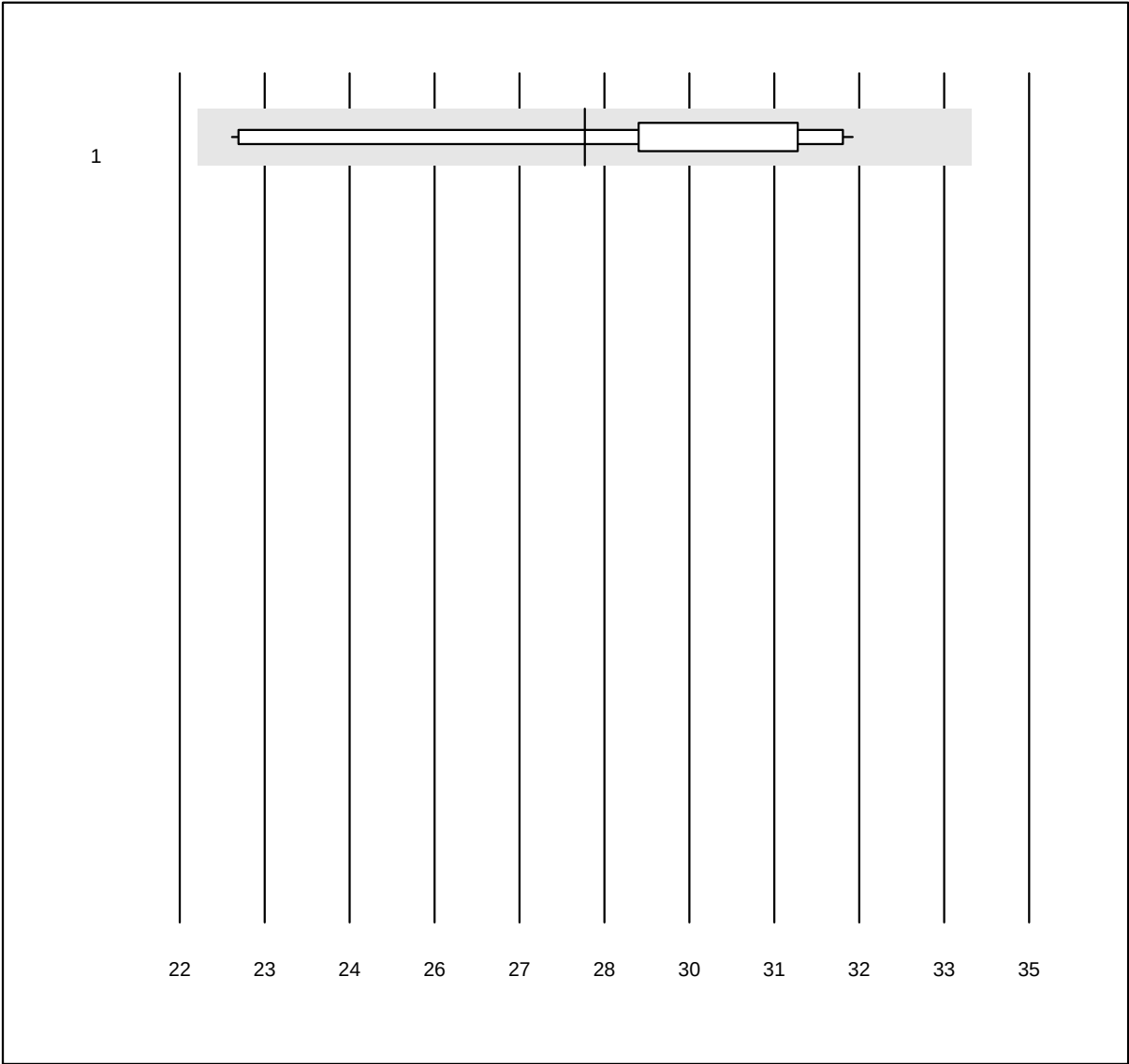


QUALAB Toleranz: 21%

AFP (μg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	14	100.0	0.0	0.0	28.2	10.0	d*

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HCG qn

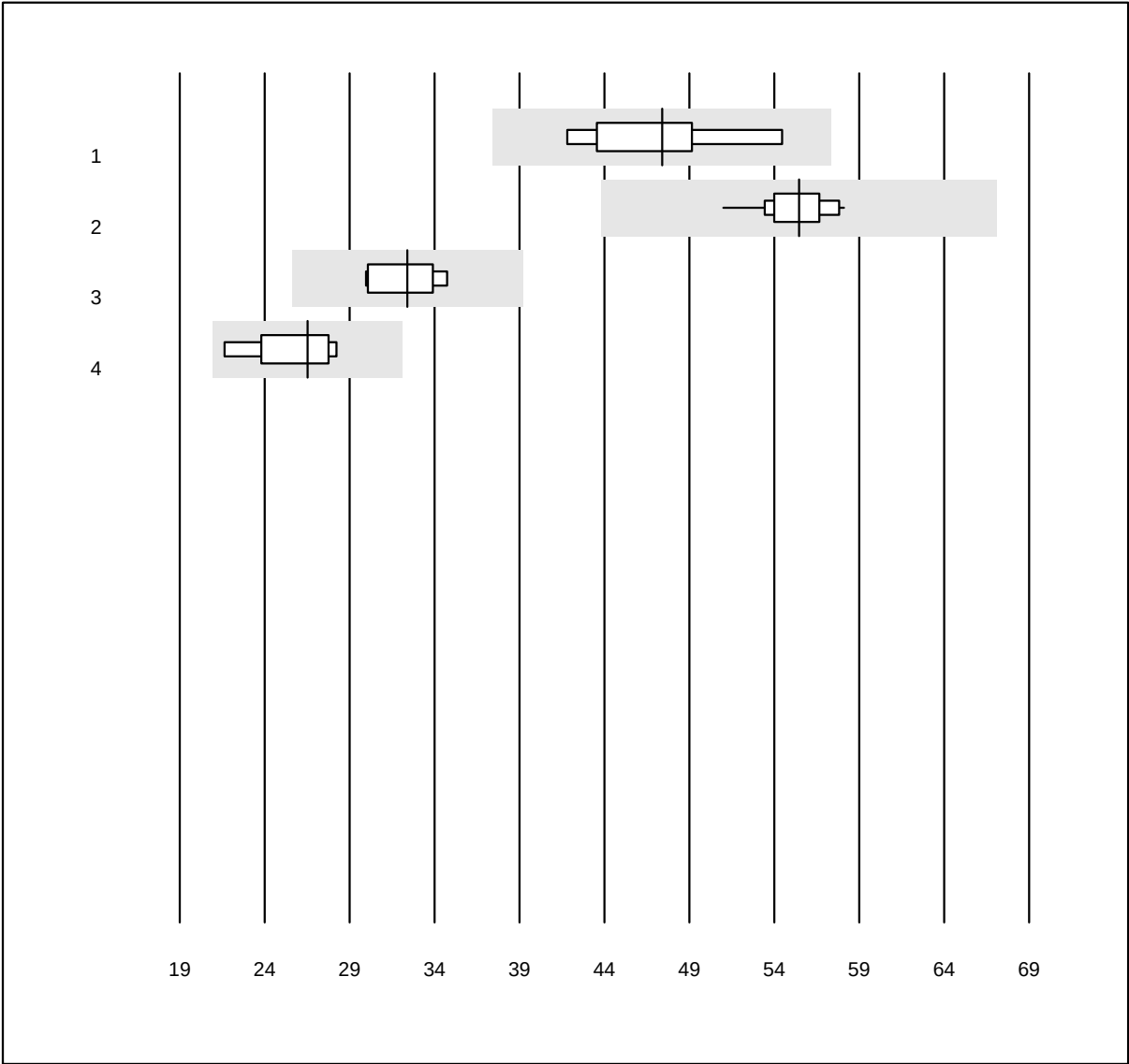


QUALAB Toleranz: 21%

HCG qn (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	47.4	8.1	e*
2 Roche	25	100.0	0.0	0.0	55.5	3.0	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	32.4	5.9	e
4 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	26.5	8.6	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CA 125

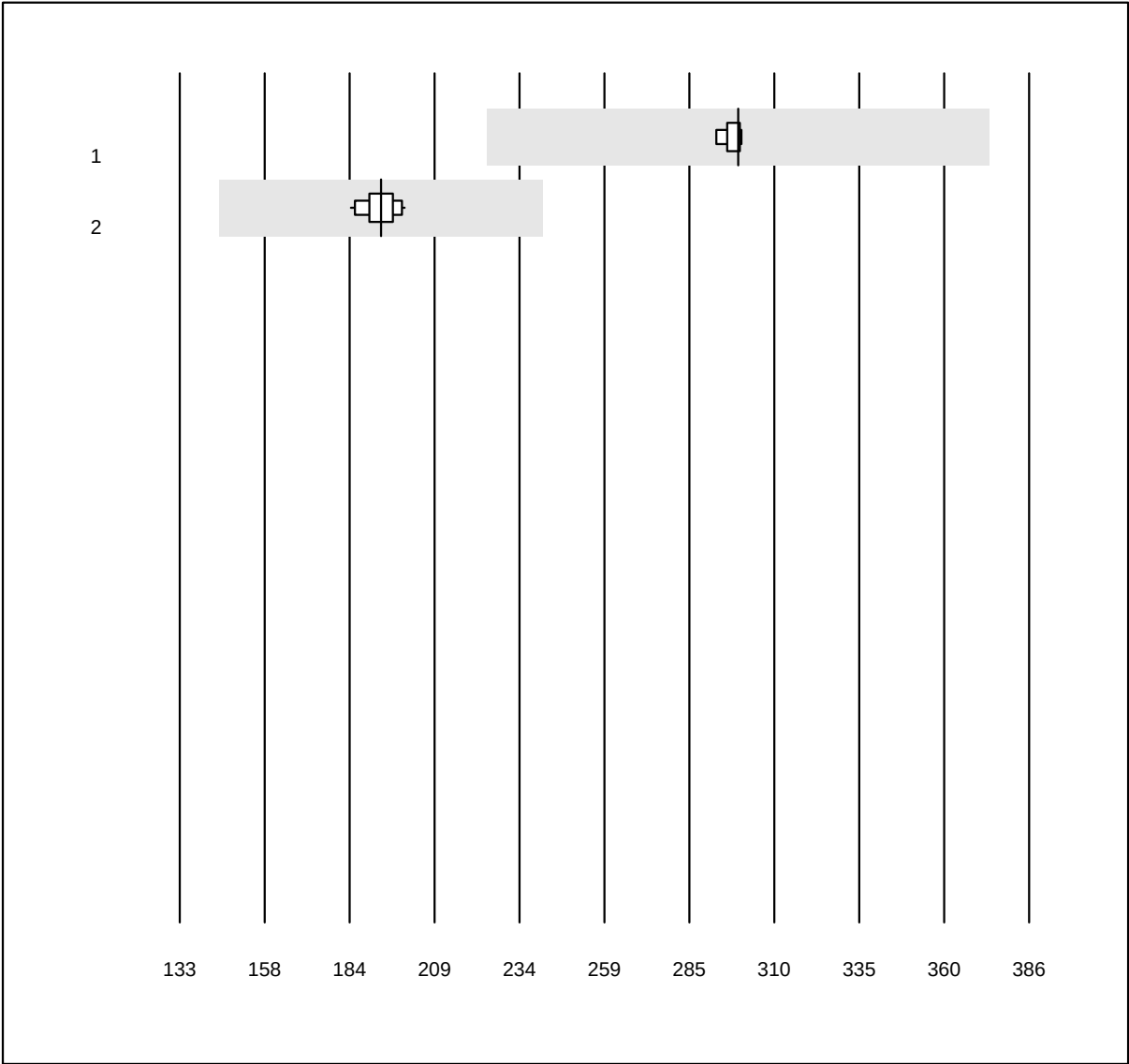


MQ Toleranz: 25%

CA 125 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	299.4	0.8	e
2 Roche	13	100.0	0.0	0.0	193.0	2.4	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CA 15-3

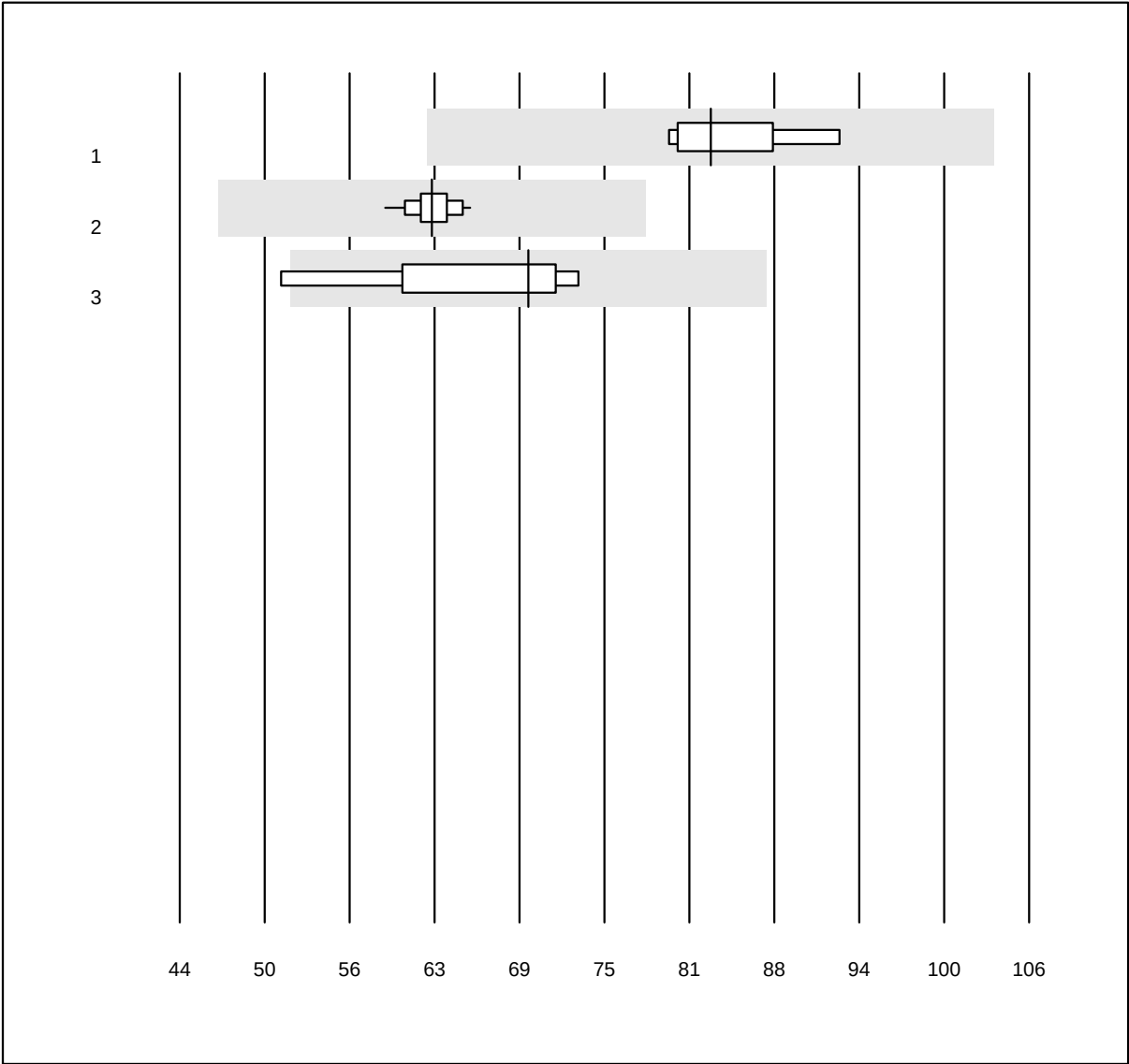


MQ Toleranz: 25%

CA 15-3 (kIU/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	82.8	4.8	e
2 Roche	15	100.0	0.0	0.0	62.4	2.3	e
3 Siemens	4	100.0	0.0	0.0	69.5	9.9	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CA 19-9

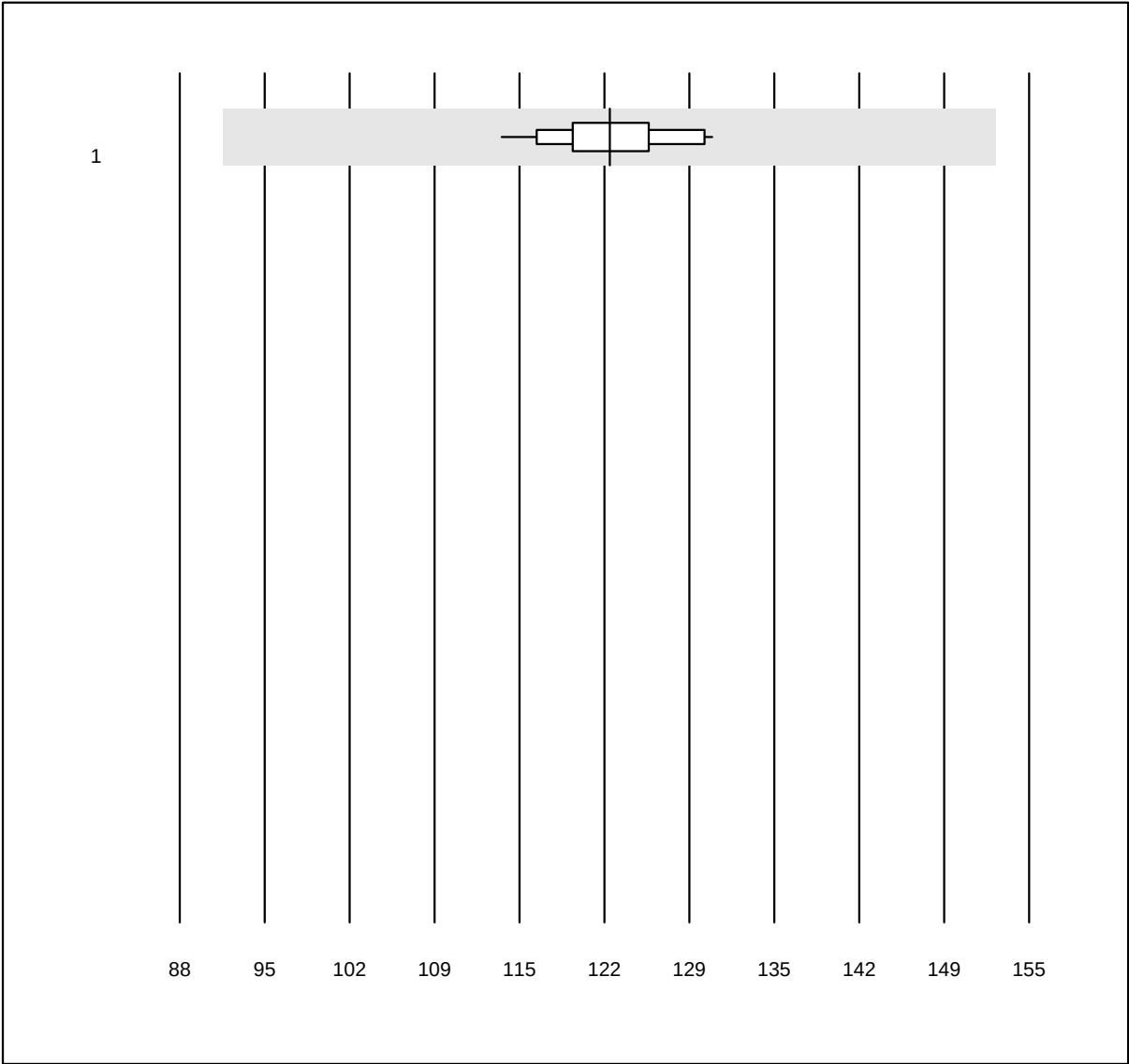


MQ Toleranz: 25%

CA 19-9 (kIU/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	15	100.0	0.0	0.0	121.9	3.5	e

4 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CEA

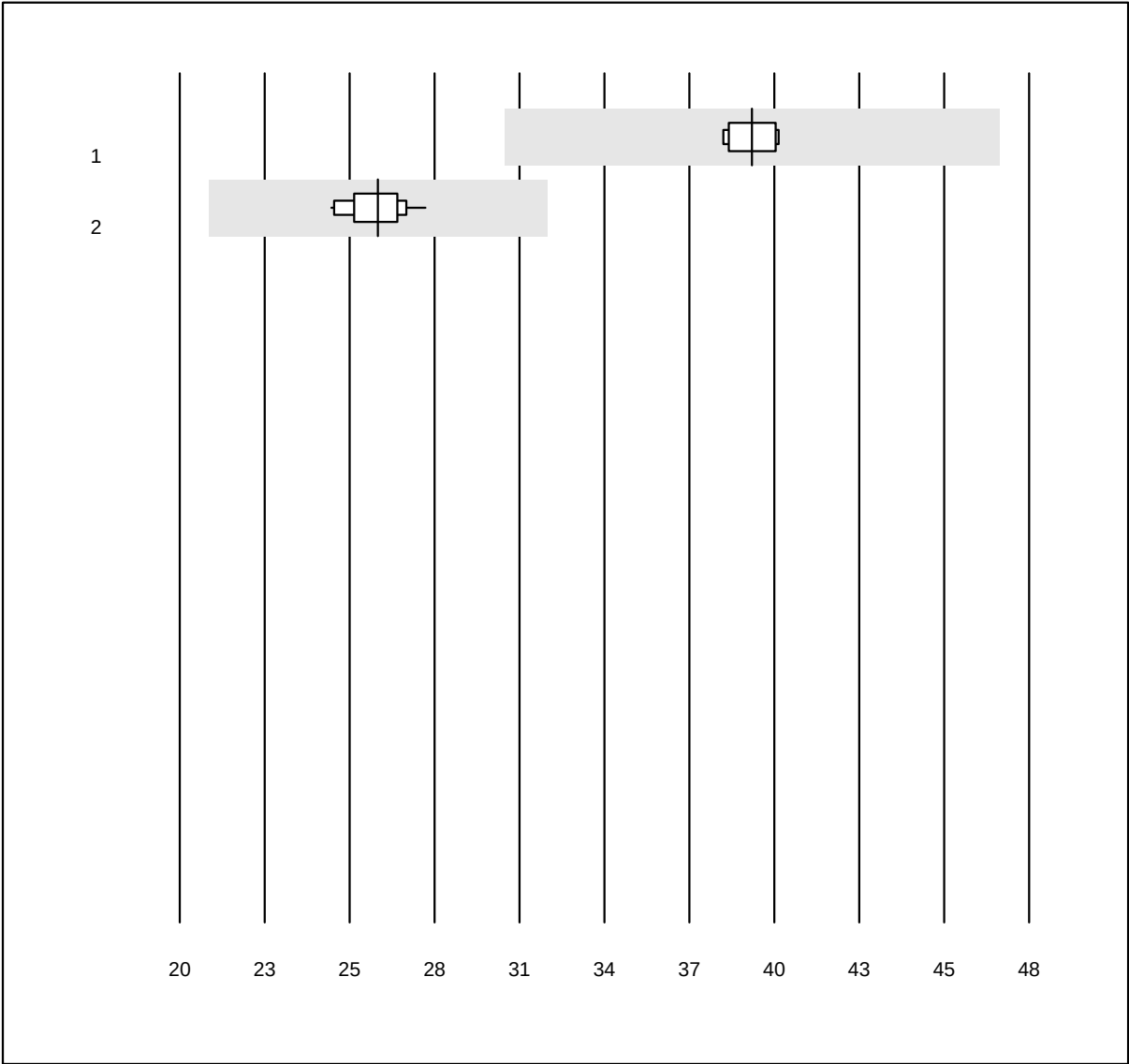


QUALAB Toleranz: 21%

CEA (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	38.9	2.0	e
2 Roche	18	100.0	0.0	0.0	26.5	3.3	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HCG intatto

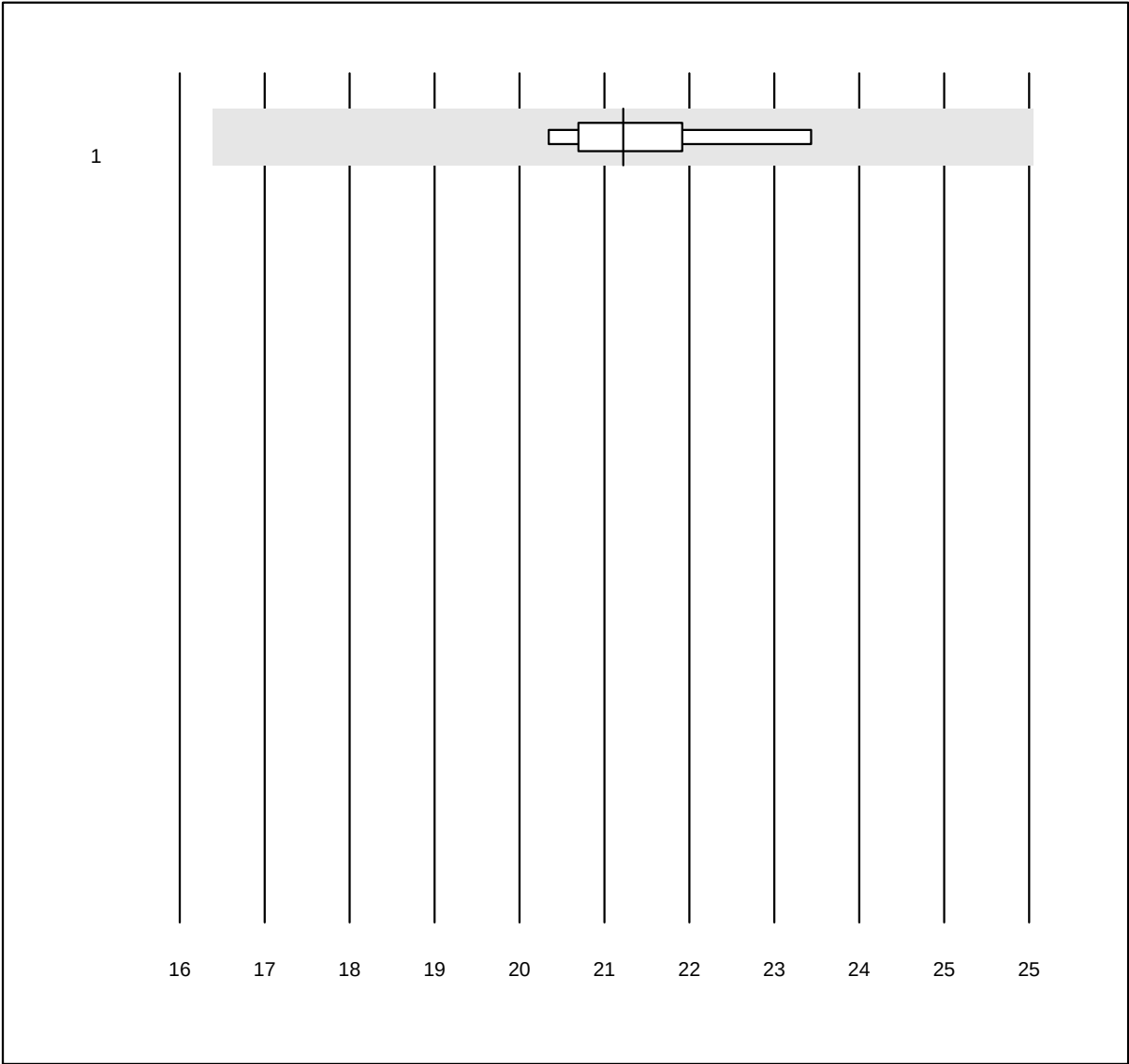


QUALAB Toleranz: 21%

HCG intatto (U/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas	6	100.0	0.0	0.0	20.7	3.9	e

NSE

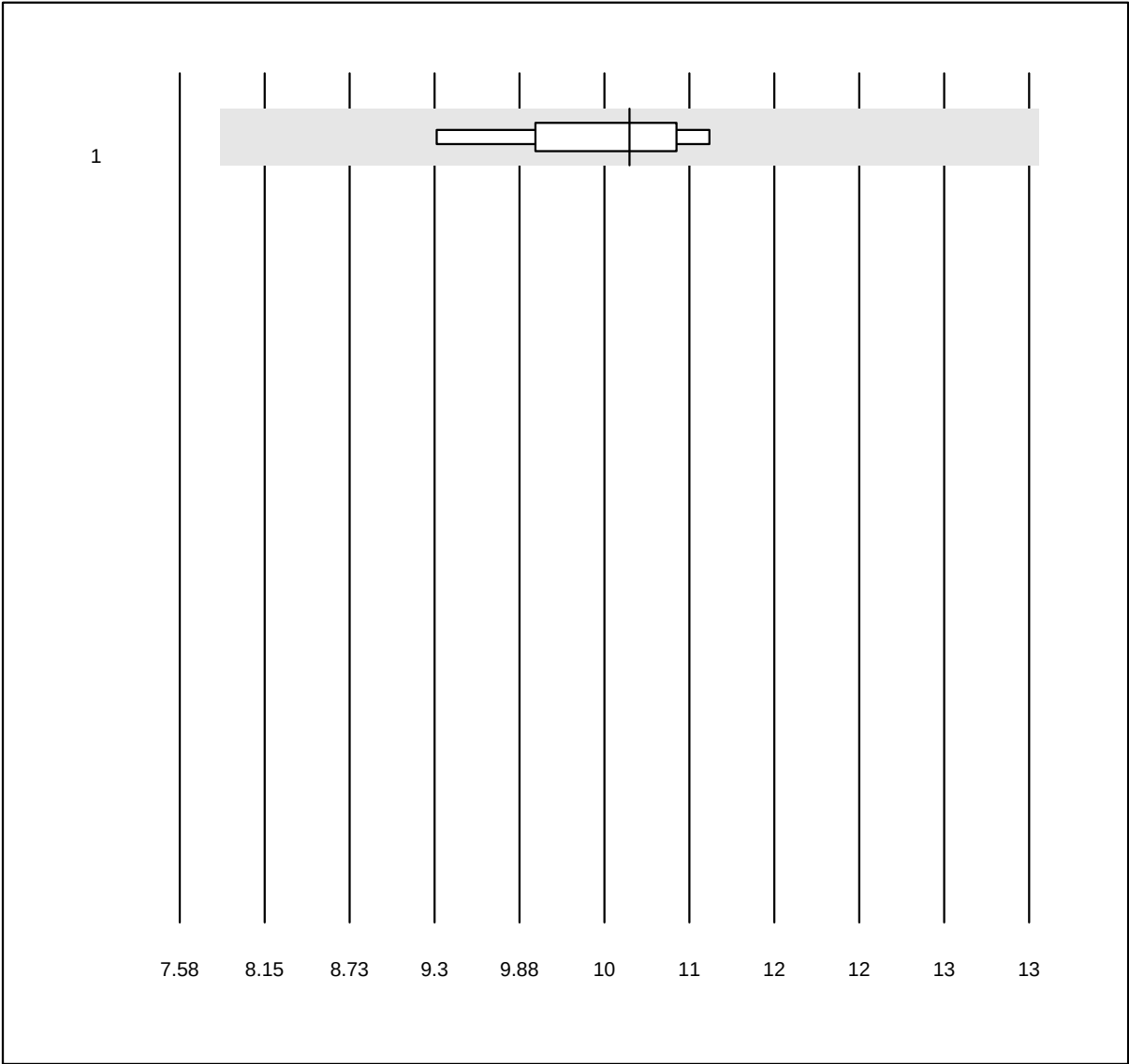


MQ Toleranz: 25%

NSE (ng/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	6	100.0	0.0	0.0	10.4	5.3	e

PSA

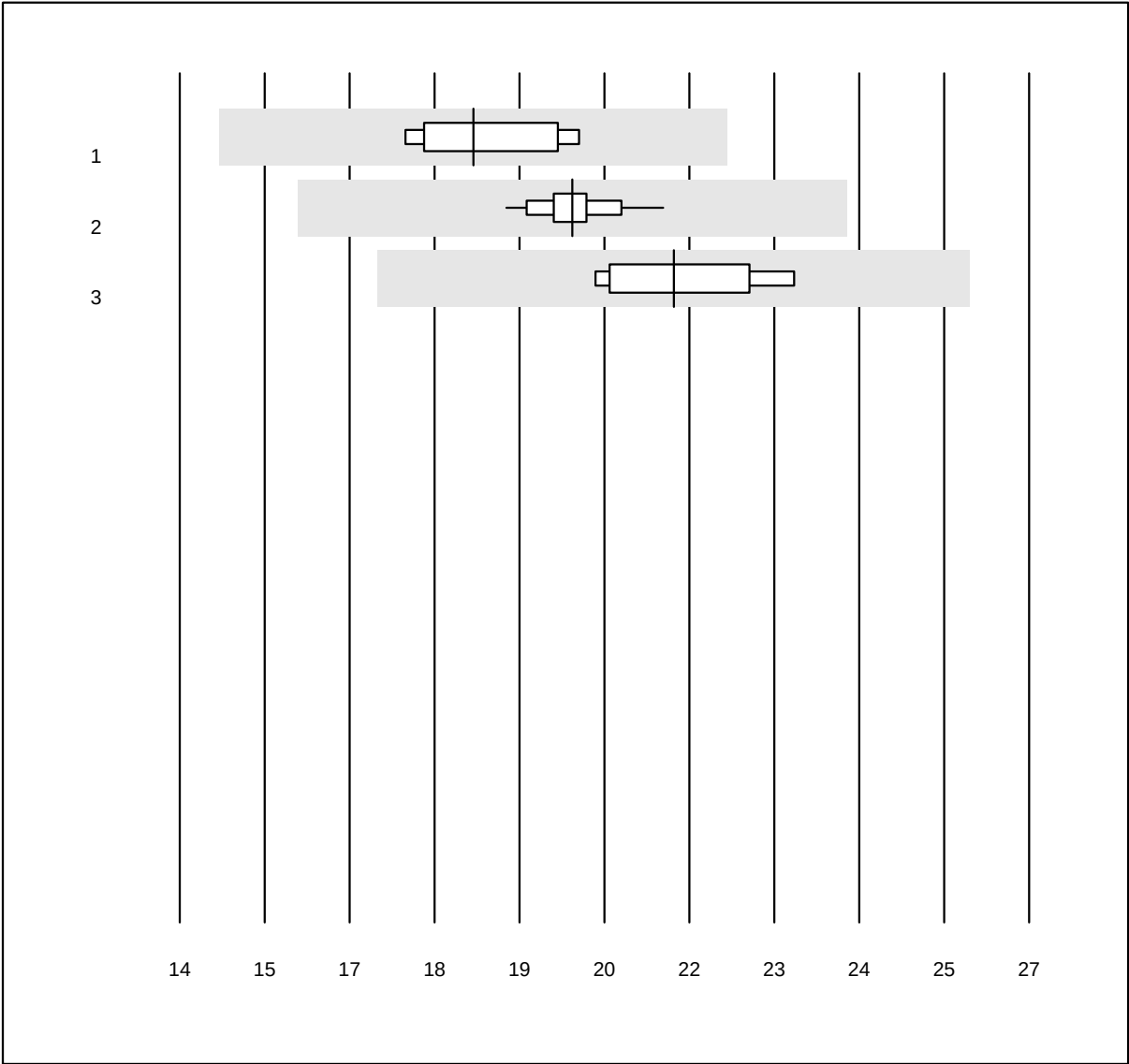


QUALAB Toleranz: 21%

PSA (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	18.50	5.3	e
2 Roche	26	100.0	0.0	0.0	20.01	2.6	e
3 AFIAS	5	100.0	0.0	0.0	21.56	5.1	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

PSA libero

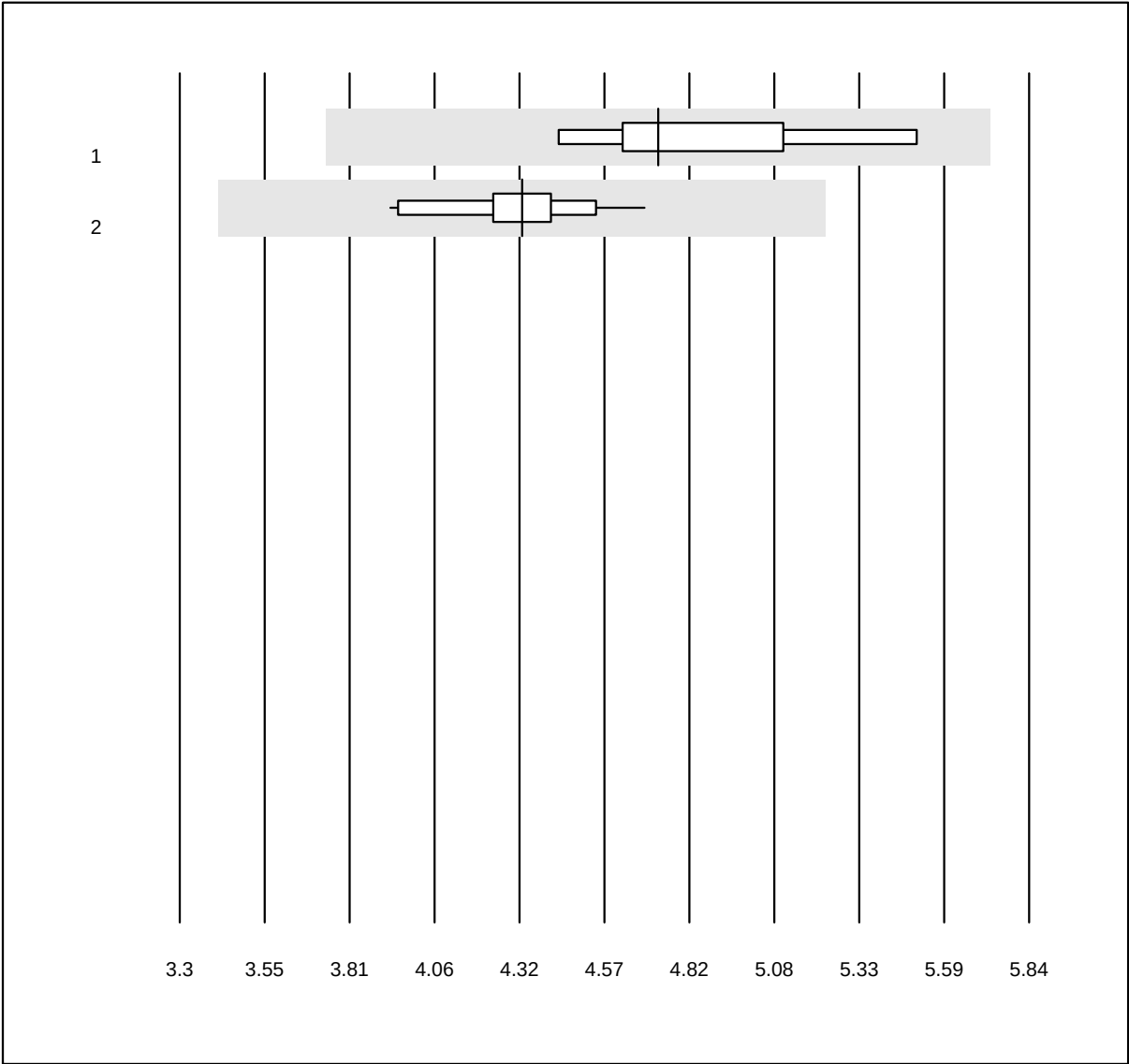


QUALAB Toleranz: 21%

PSA libero (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Abbott	6	100.0	0.0	0.0	4.73	6.6	e*
2	Roche	20	100.0	0.0	0.0	4.32	4.4	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

S100

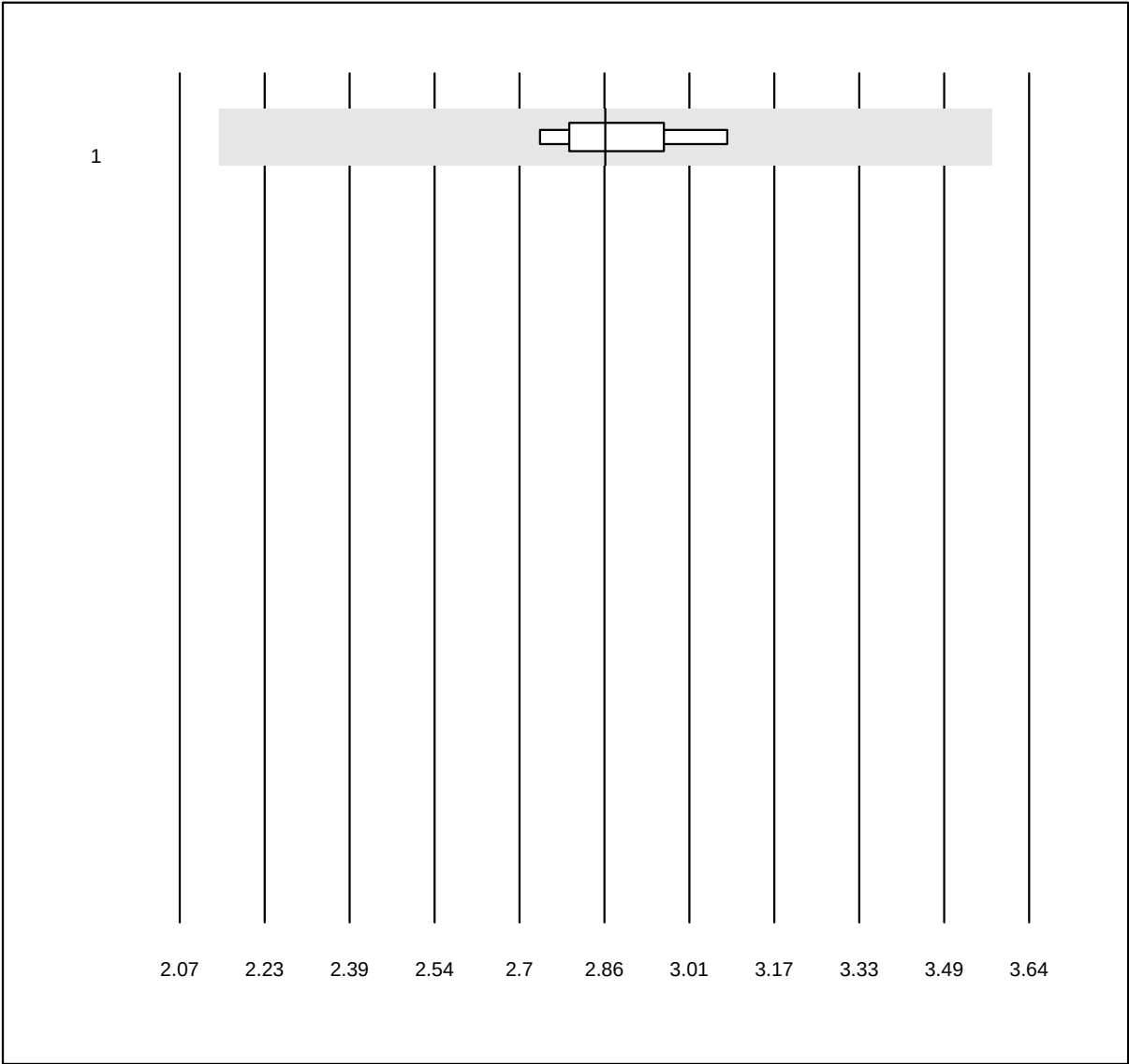


MQ Toleranz: 25%

S100 (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	2.86	3.5	e

Tireoglobulina

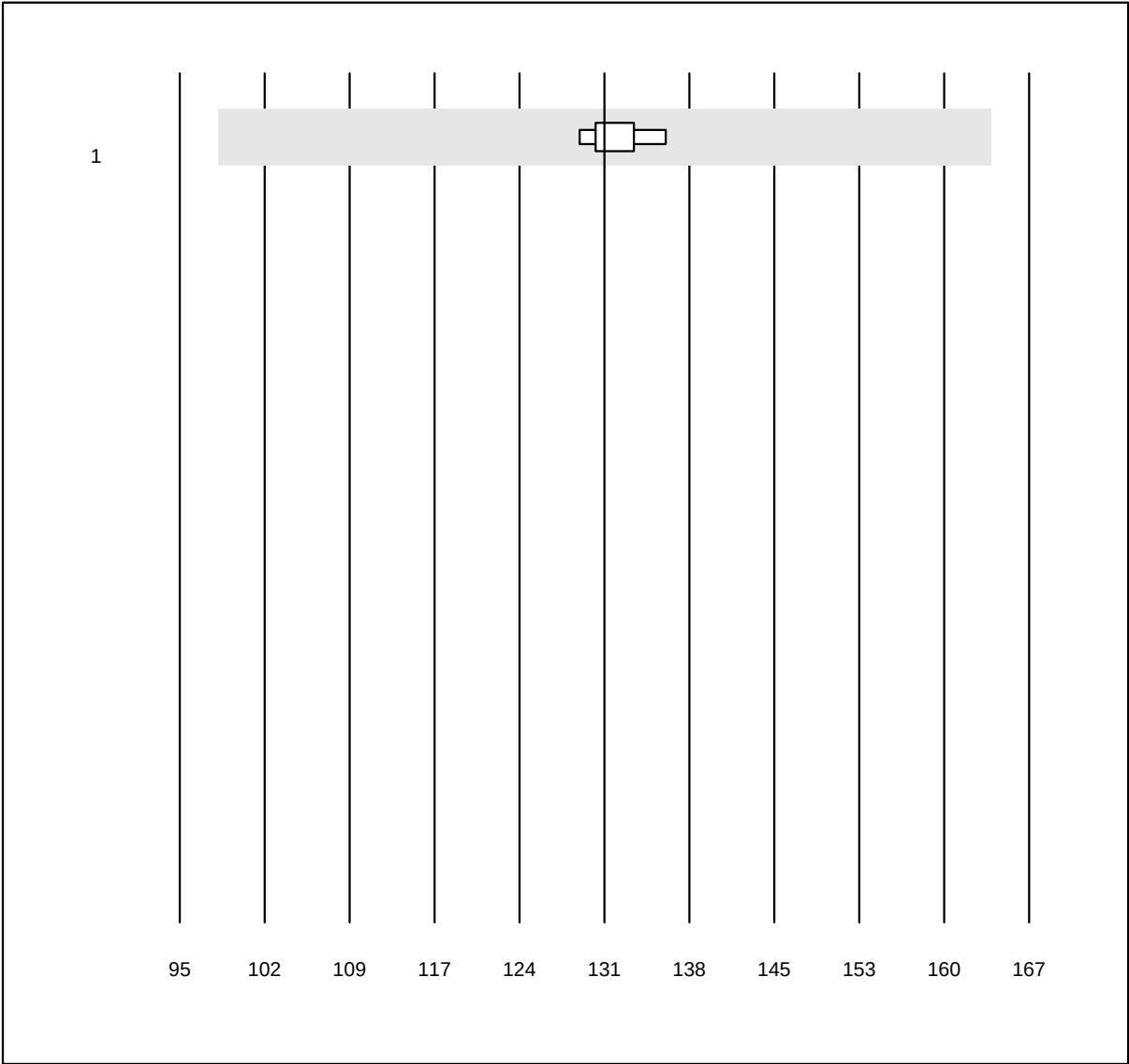


MQ Toleranz: 25%

Tireoglobulina (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	131.0	1.7	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CK-MB

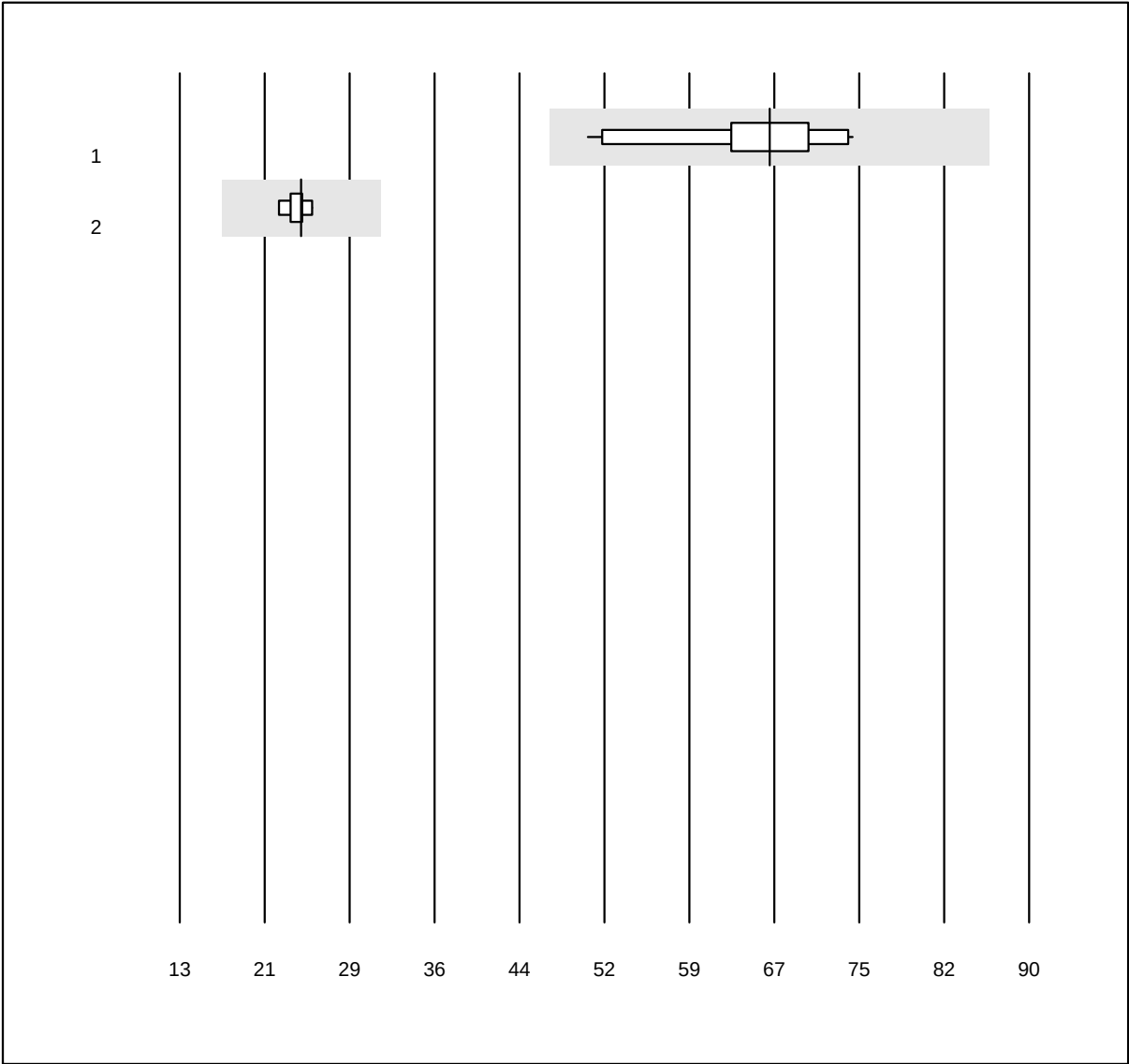


MQ Toleranz: 30%

CK-MB (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Fuji Dri-Chem	10	100.0	0.0	0.0	66.5	10.0	e
2 Cobas/Roche	9	100.0	0.0	0.0	24.0	3.9	e

ACTH

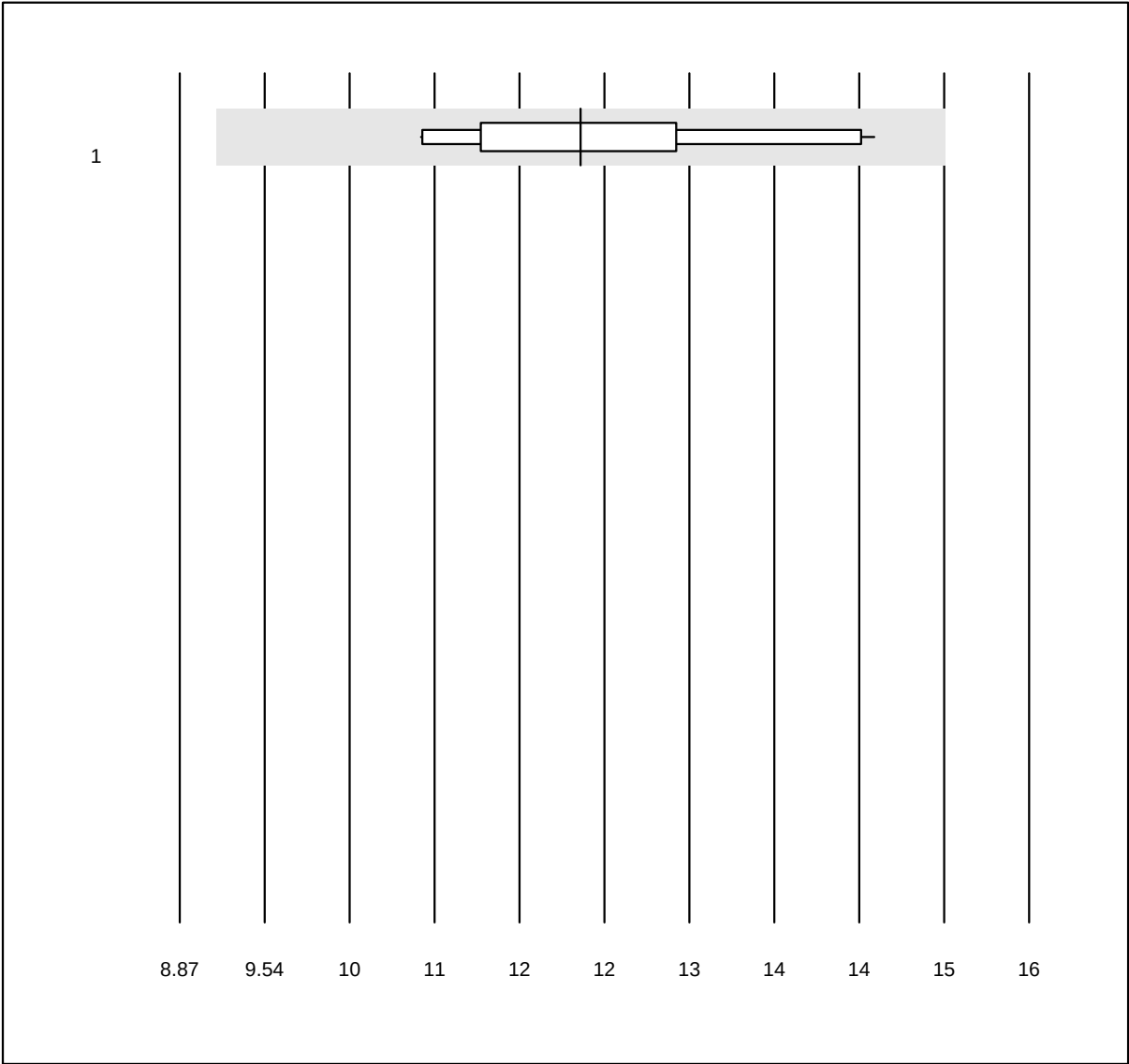


MQ Toleranz: 25%

ACTH (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	10	100.0	0.0	0.0	12.24	9.6	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Peptide C

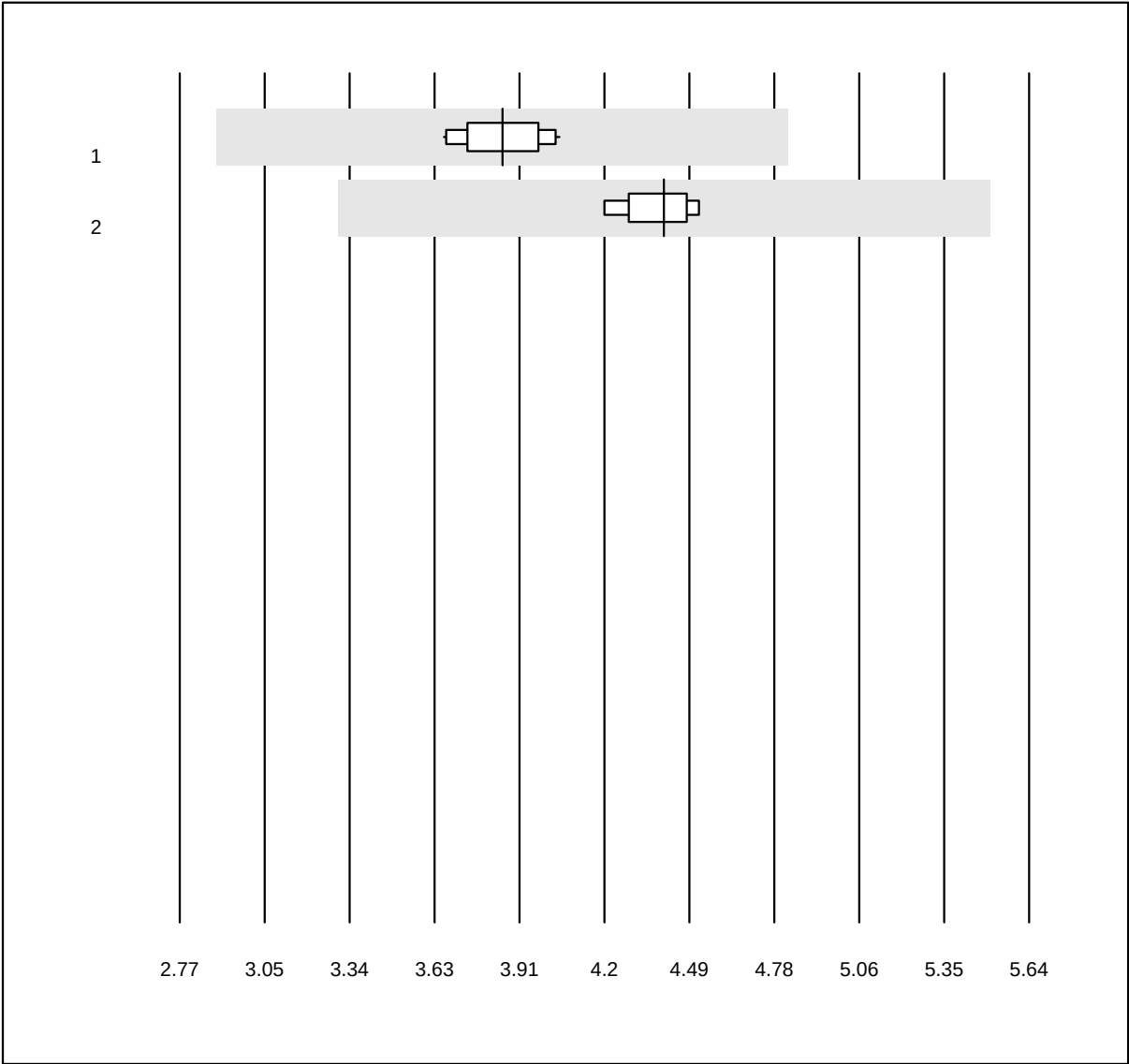


MQ Toleranz: 25%

Peptide C (nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	11	100.0	0.0	0.0	3.86	3.3	e
2	altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	4.41	2.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Procalcitonina

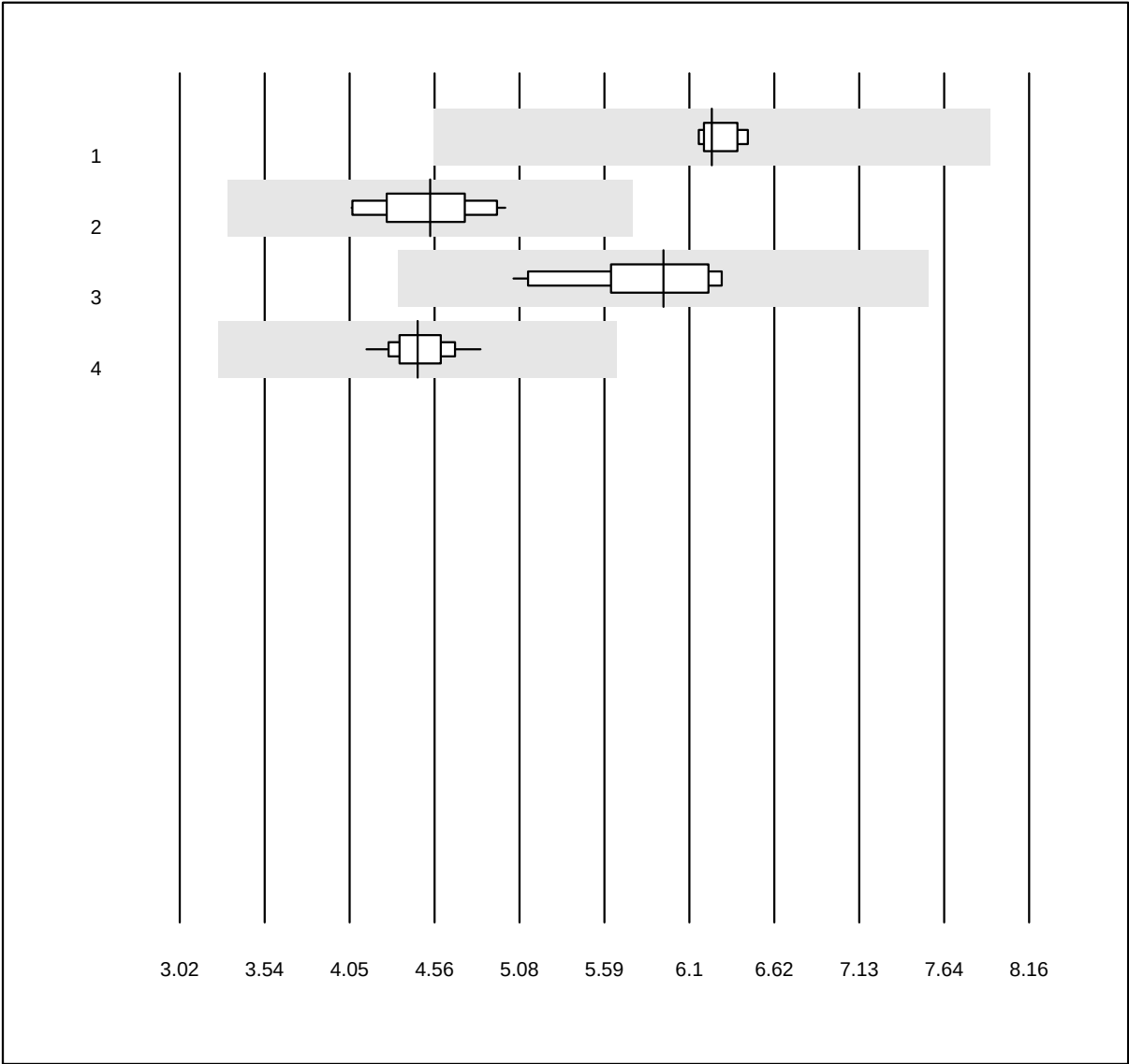


QUALAB Toleranz: 27%

Procalcitonina (µg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	6.24	1.7	e
2 VIDAS	14	100.0	0.0	0.0	4.54	6.7	e
3 Siemens	11	100.0	0.0	0.0	5.95	6.6	e
4 Roche	23	100.0	0.0	0.0	4.46	3.6	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Paratormone

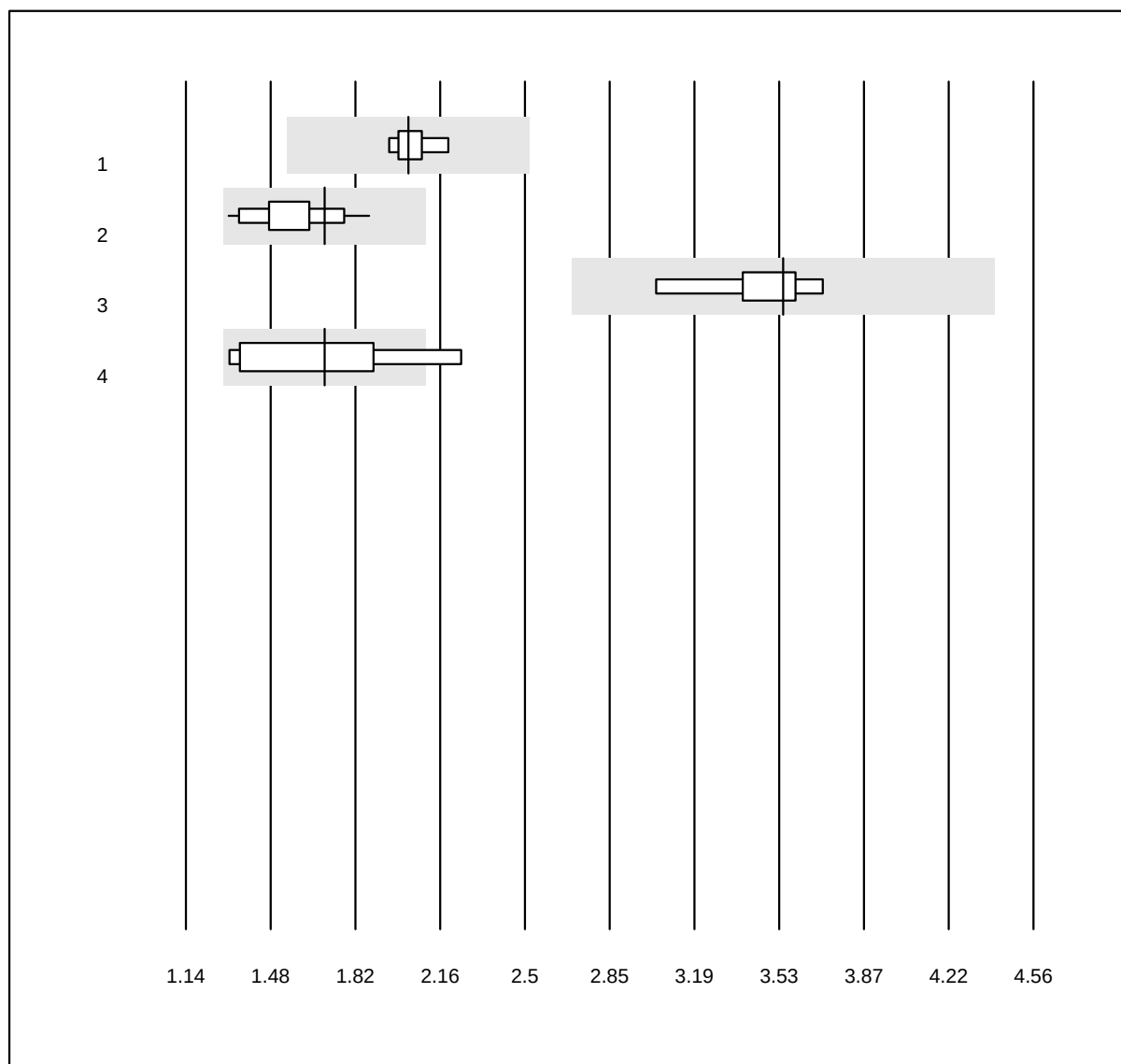


QUALAB Toleranz: 24%

Paratormone (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Cobas	8	100.0	0.0	0.0	2.0	3.5	e
2 Cobas PTH STAT	17	100.0	0.0	0.0	1.7	9.3	a
3 ADVIA Centaur XP/CP	8	100.0	0.0	0.0	3.5	5.7	e
4 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	1.7	19.3	a*

6 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio-K22

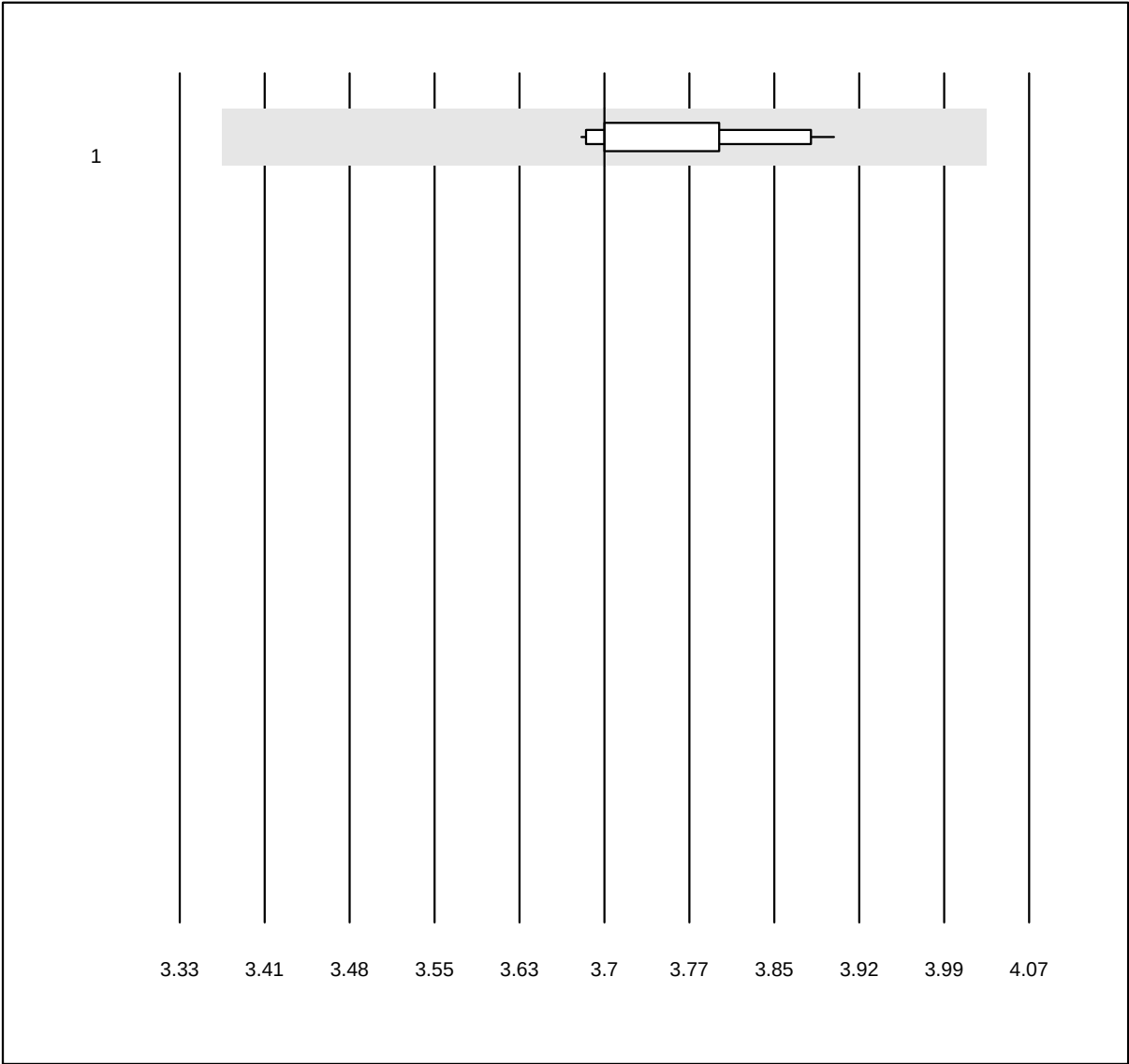


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio-K22 (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Chimica umida	13	84.6	0.0	15.4	3.7	1.8	e

Urea-K22

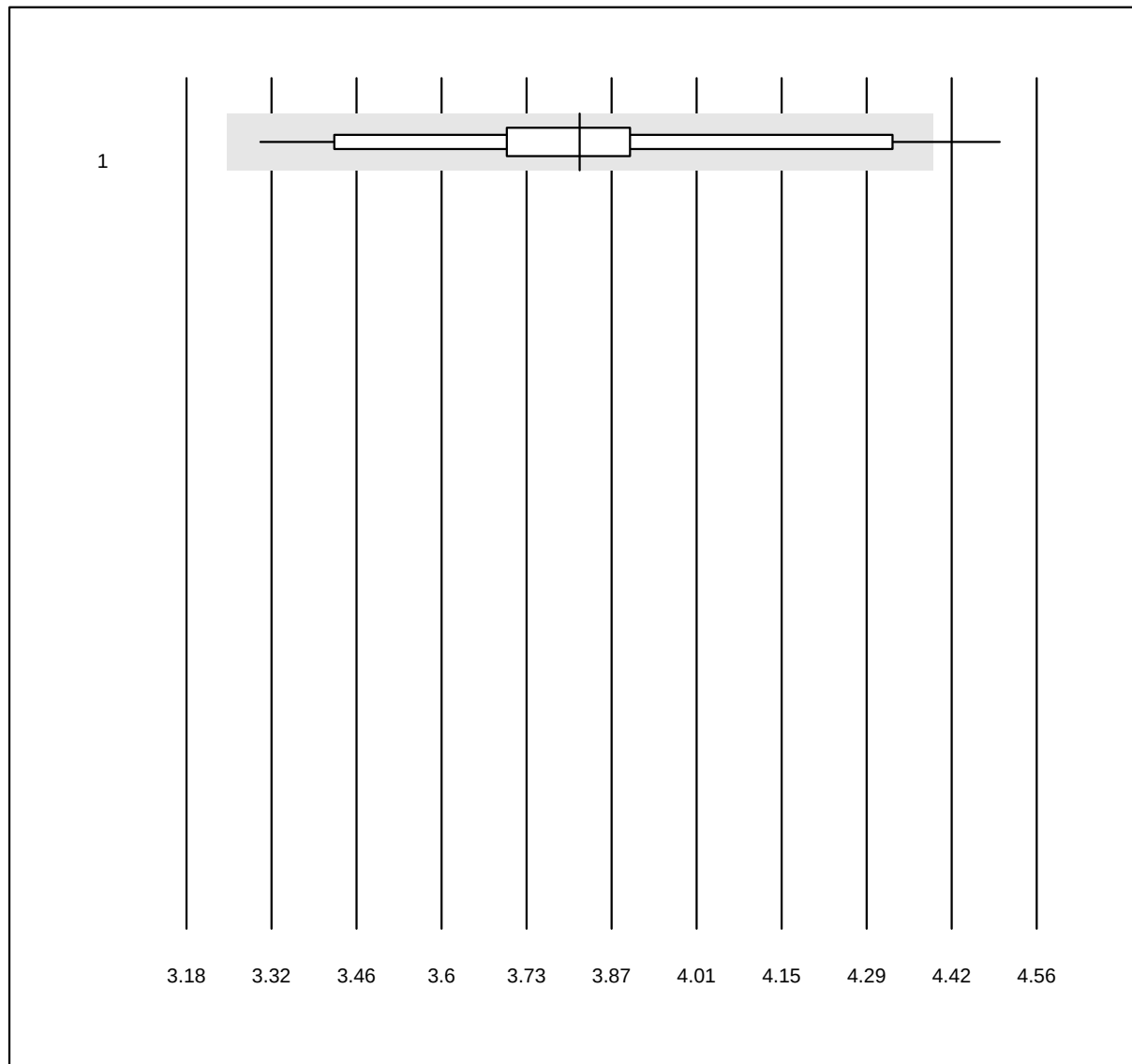


QUALAB Toleranz: 15%

Urea-K22 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Chimica umida	13	84.6	7.7	7.7	3.8	7.1	e*

Potassio-K22

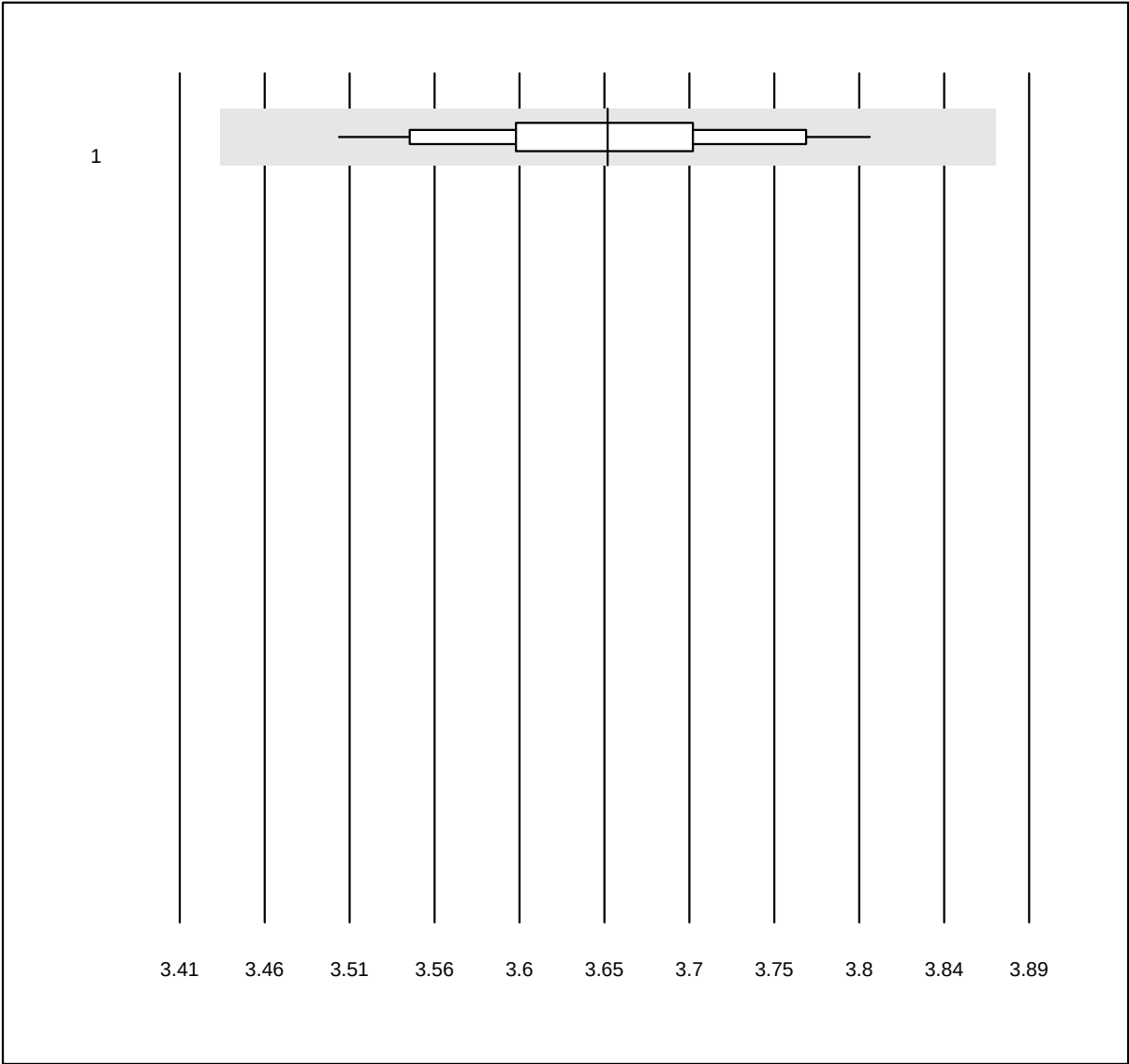


QUALAB Toleranz: 6%

Potassio-K22 (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	ISE	13	100.0	0.0	0.0	3.7	2.1	e

Sodio-K22

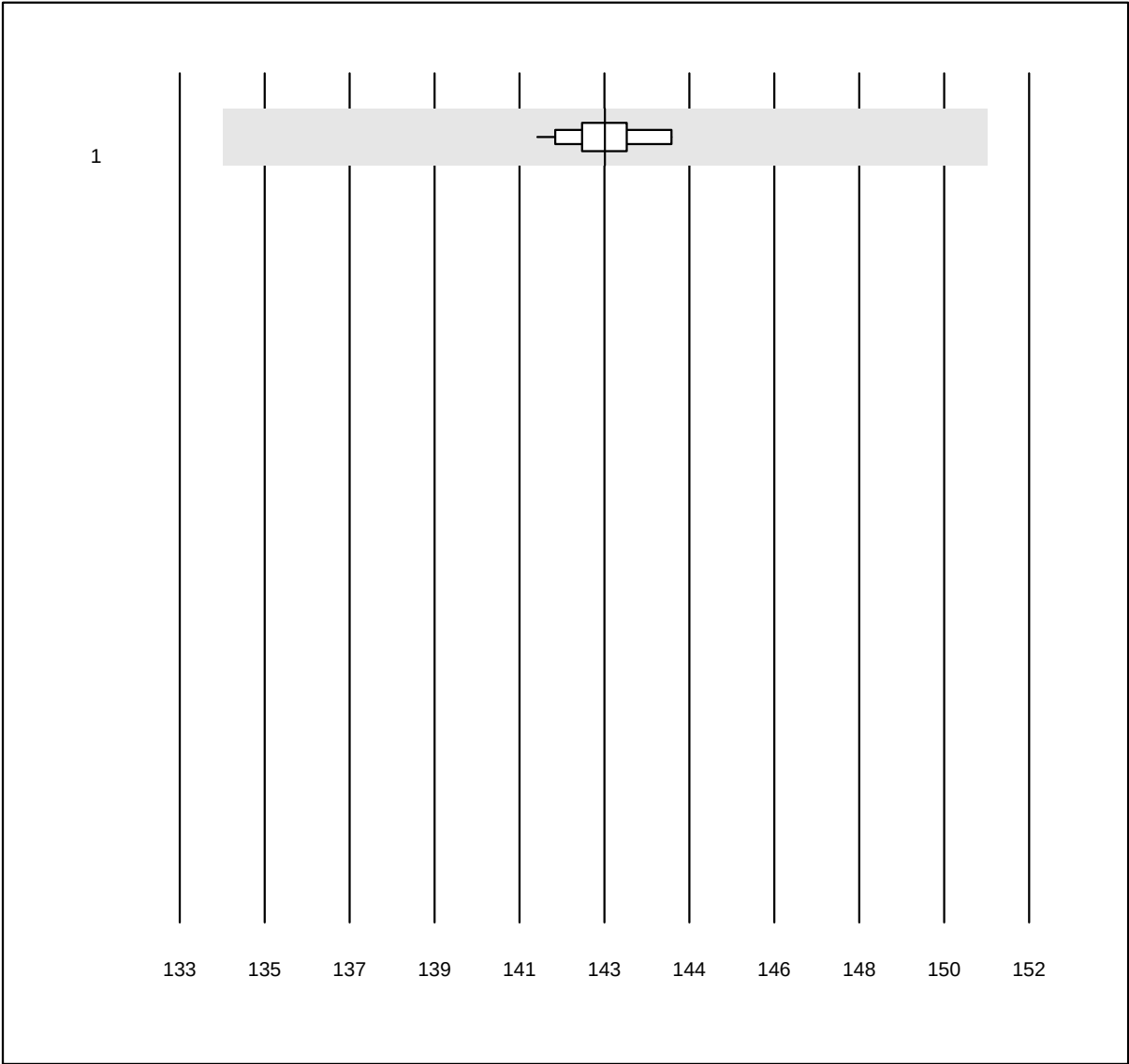


QUALAB Toleranz: 6%

Sodio-K22 (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	ISE	13	100.0	0.0	0.0	143	0.6	e

Osmolalità

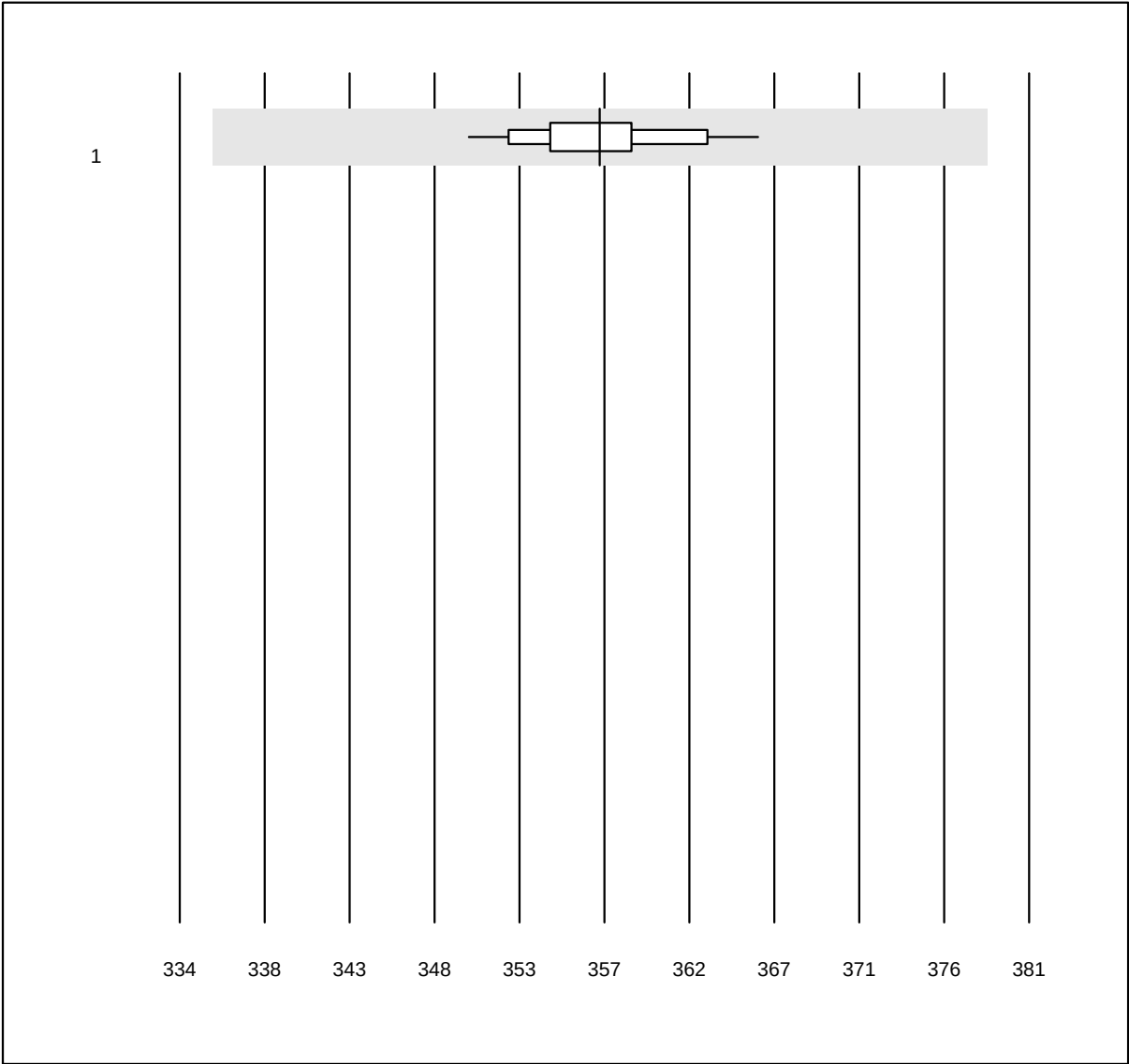


QUALAB Toleranz: 6%

Osmolalità (mosm/kg)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Crioscopia	25	100.0	0.0	0.0	357	1.1	e

Gap osmotico

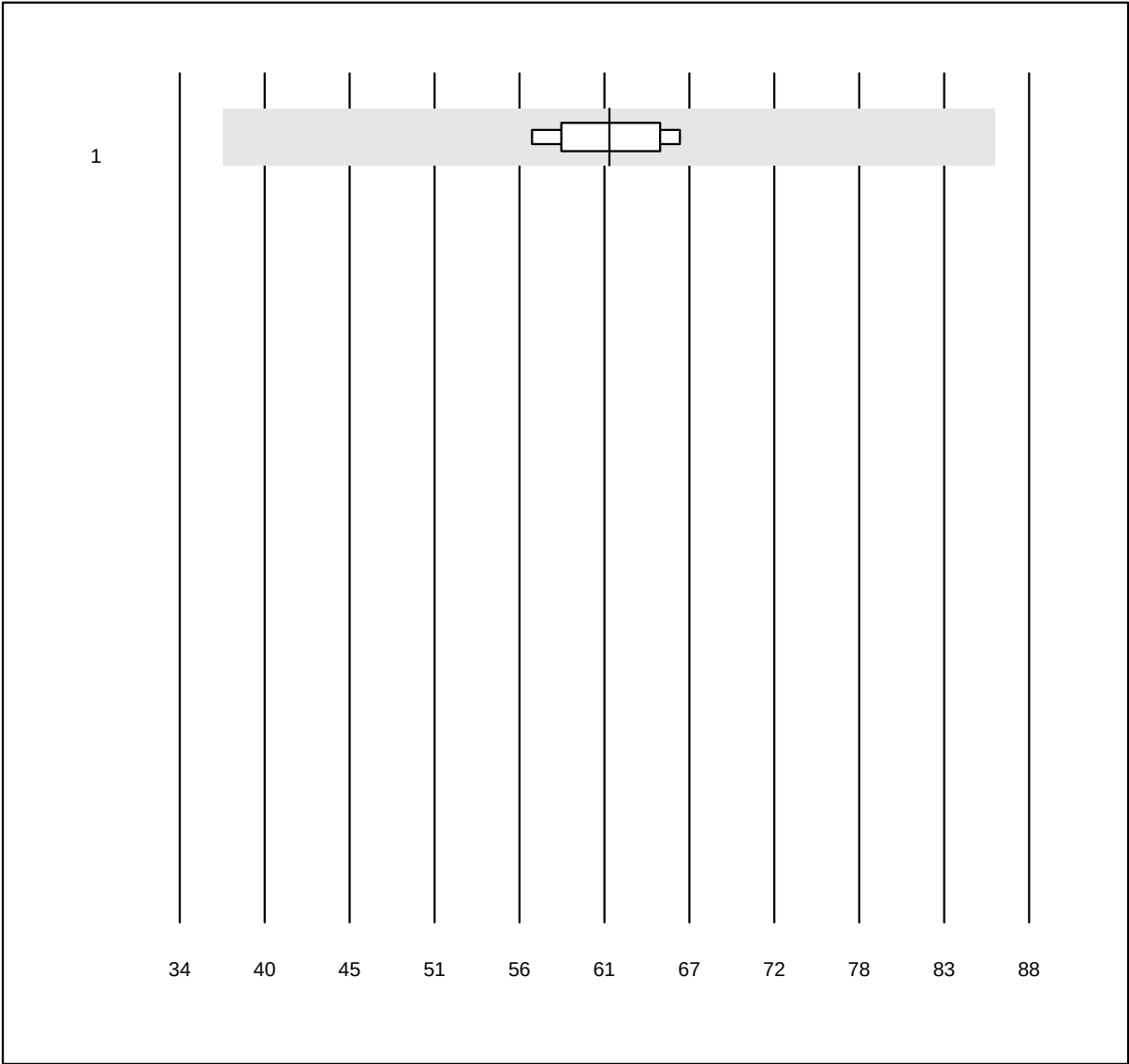


MQ Toleranz: 40%

Gap osmotico (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Formula 1 (2Na+K+Glu+Hst)	9	100.0	0.0	0.0	61.3	5.6	e
1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)							

Digoxina

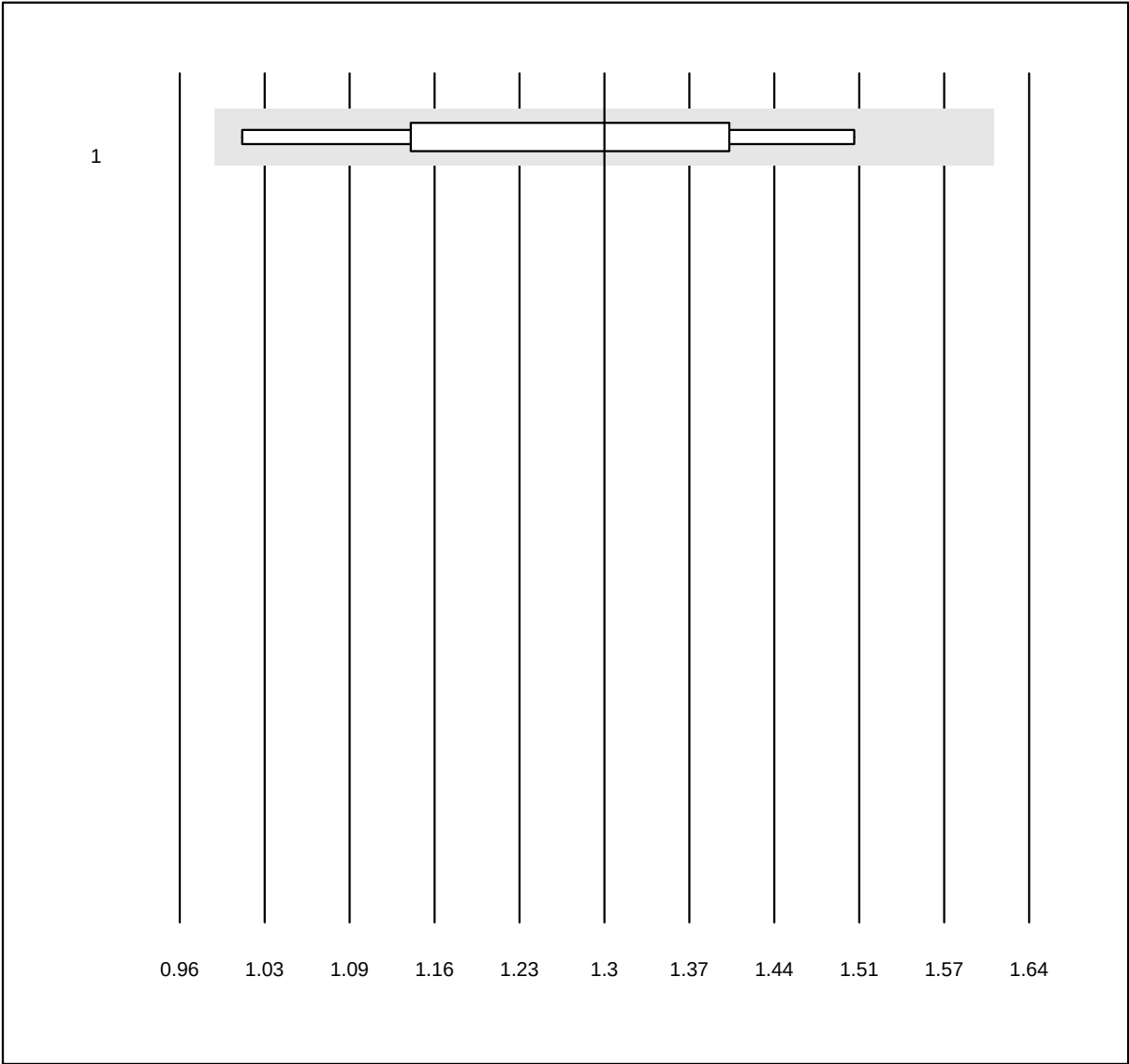


QUALAB Toleranz: 24%

Digoxina (nmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	9	100.0	0.0	0.0	1.30	12.9	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Paracetamolo

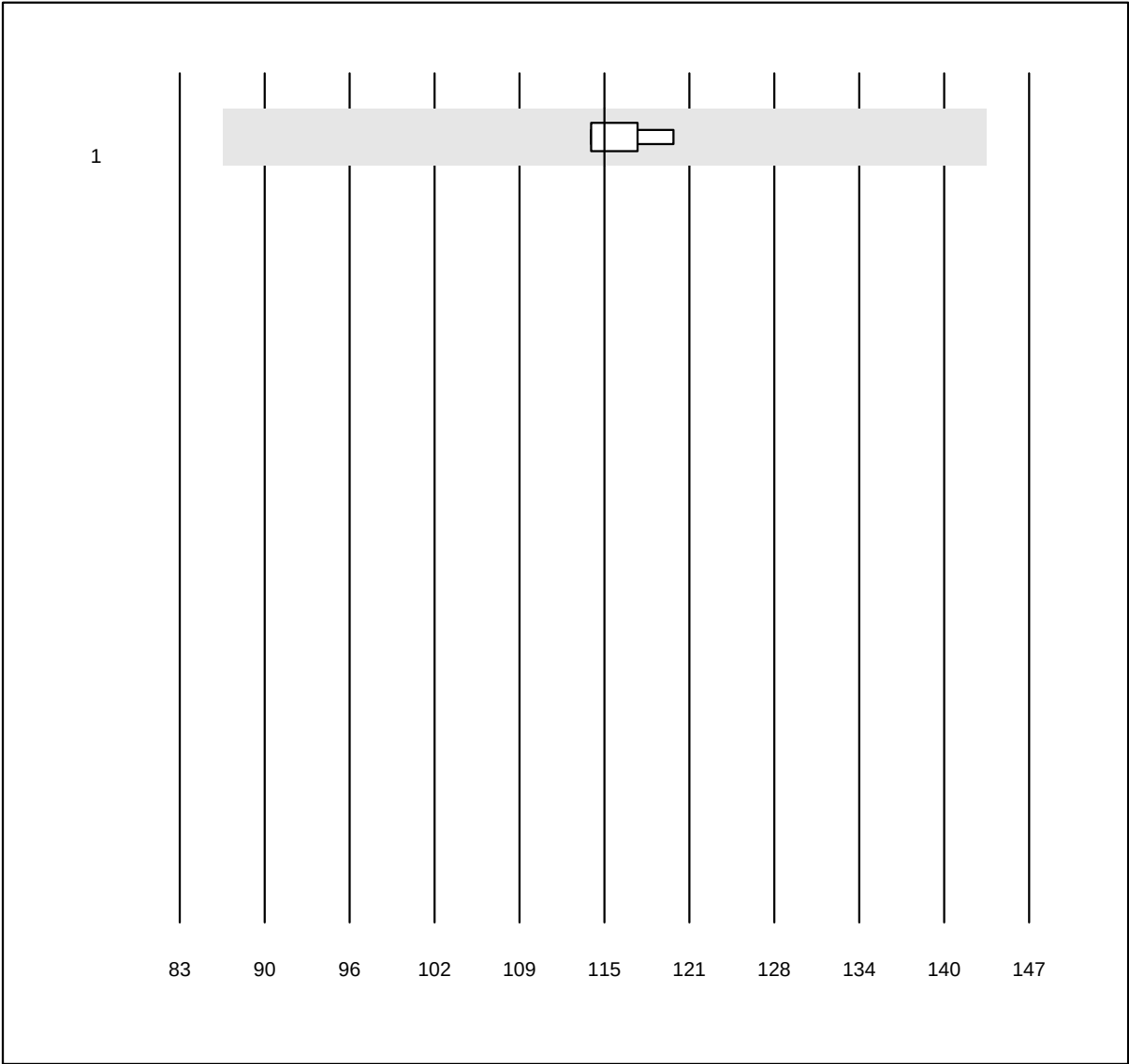


MQ Toleranz: 25%

Paracetamolo (µmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	115.0	1.8	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Valproato

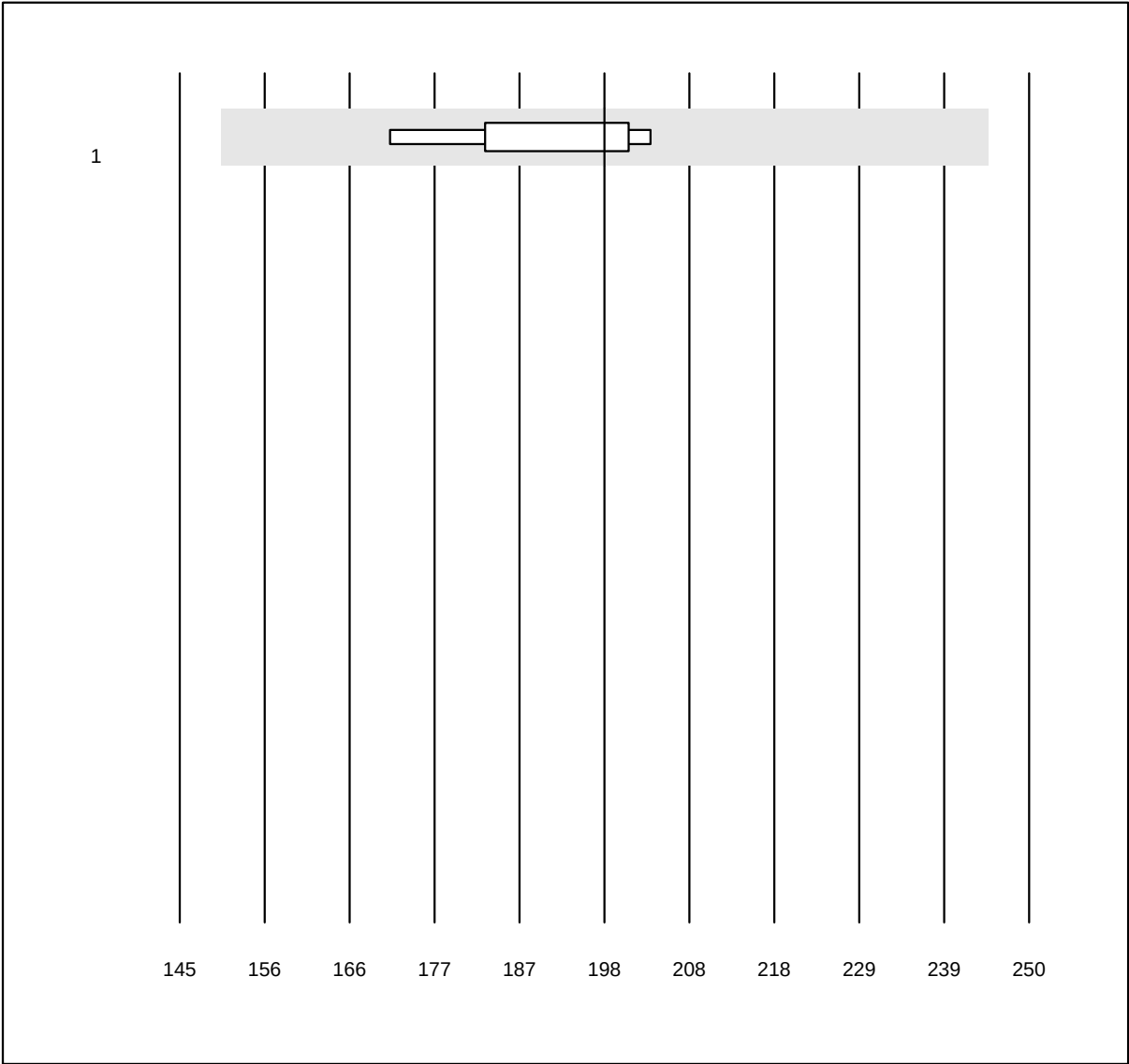


MQ Toleranz: 24%

Valproato (μmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	8	100.0	0.0	0.0	197.5	5.8	e

Vancomicina

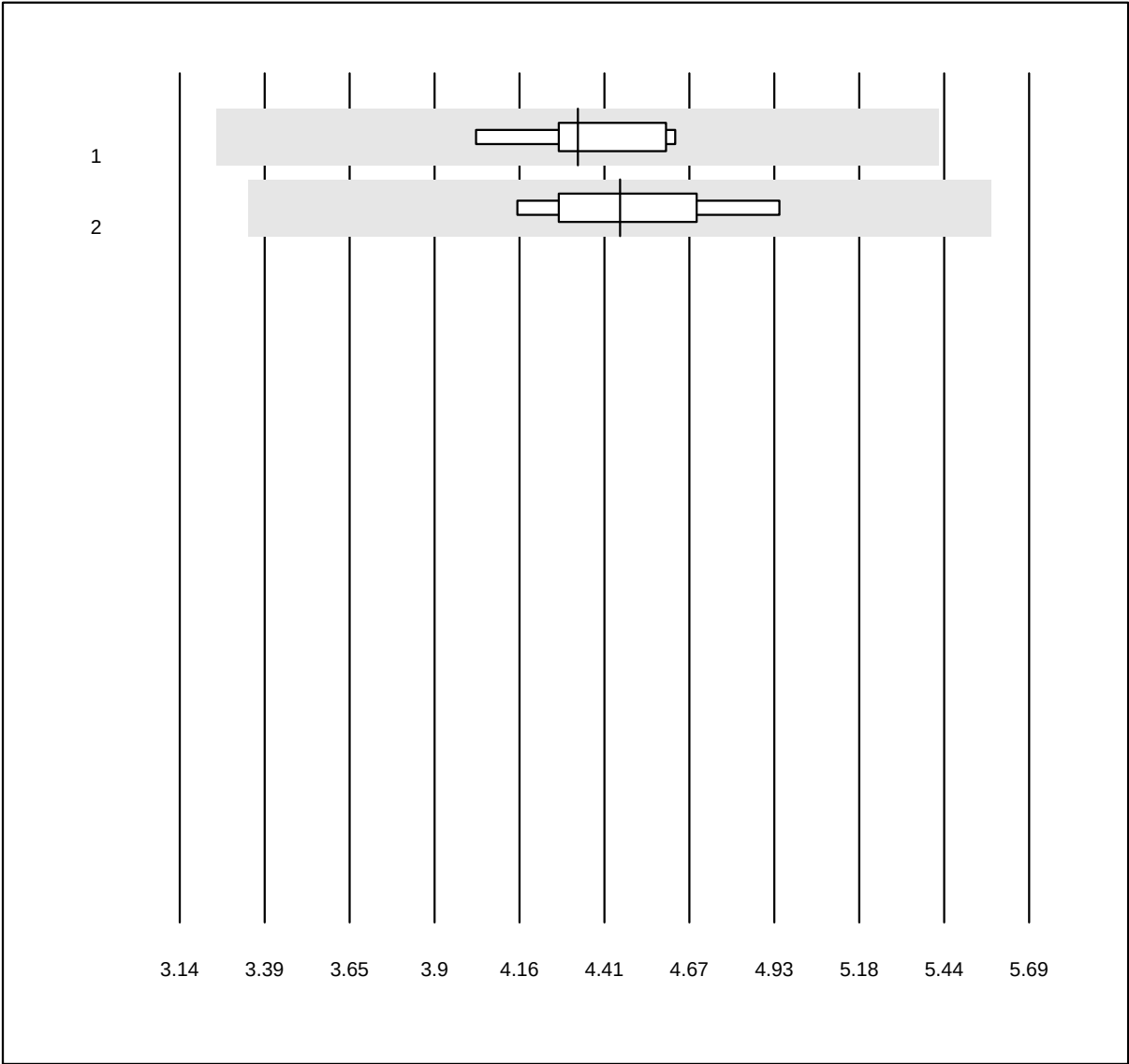


MQ Toleranz: 25%

Vancomicina ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	7	100.0	0.0	0.0	4.3	4.4	e
2 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	4.5	5.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Cistatina C

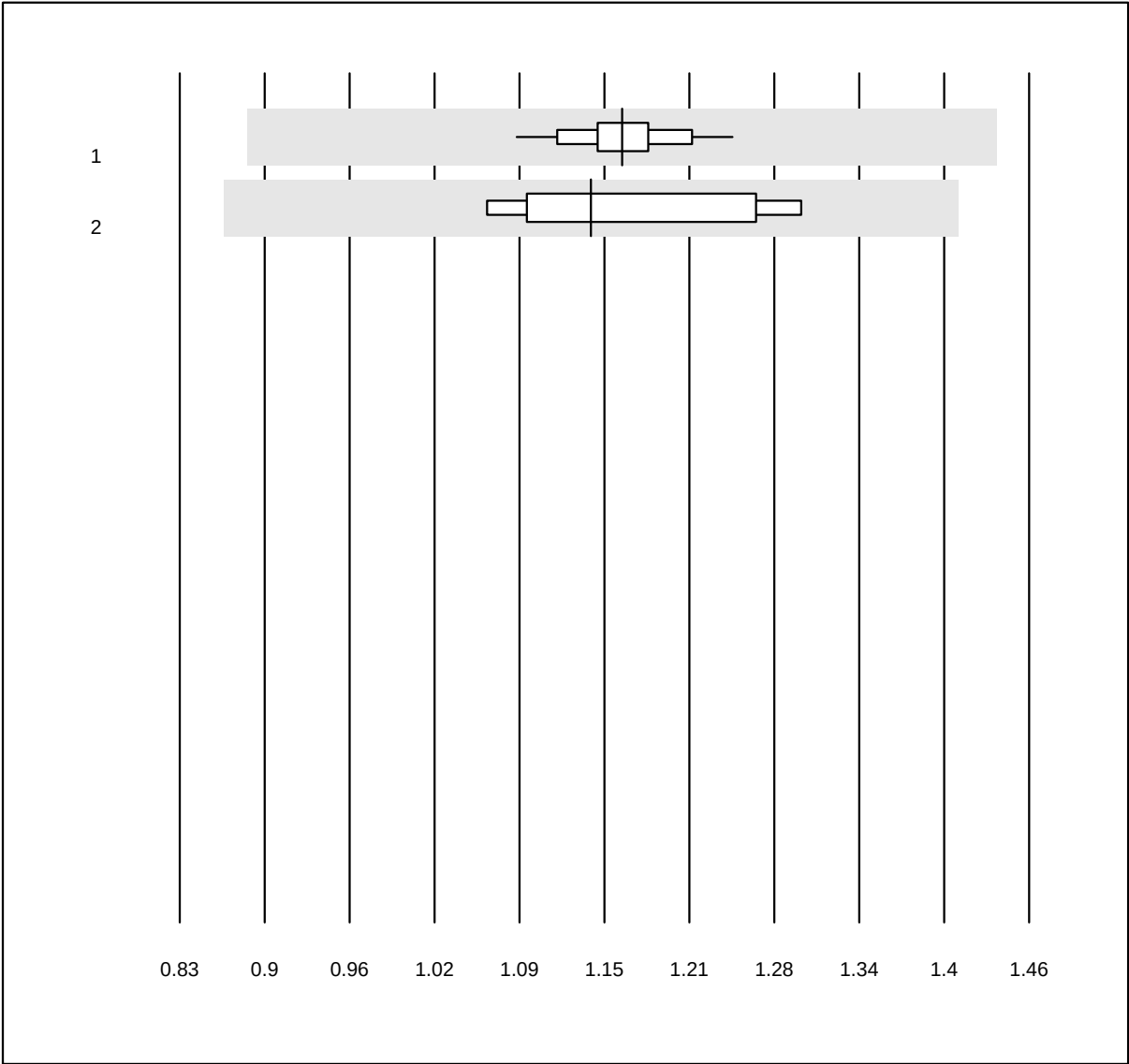


MQ Toleranz: 24%

Cistatina C (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	24	100.0	0.0	0.0	1.16	3.0	e
2 Nefelometria	8	100.0	0.0	0.0	1.14	7.5	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Ammoniaca

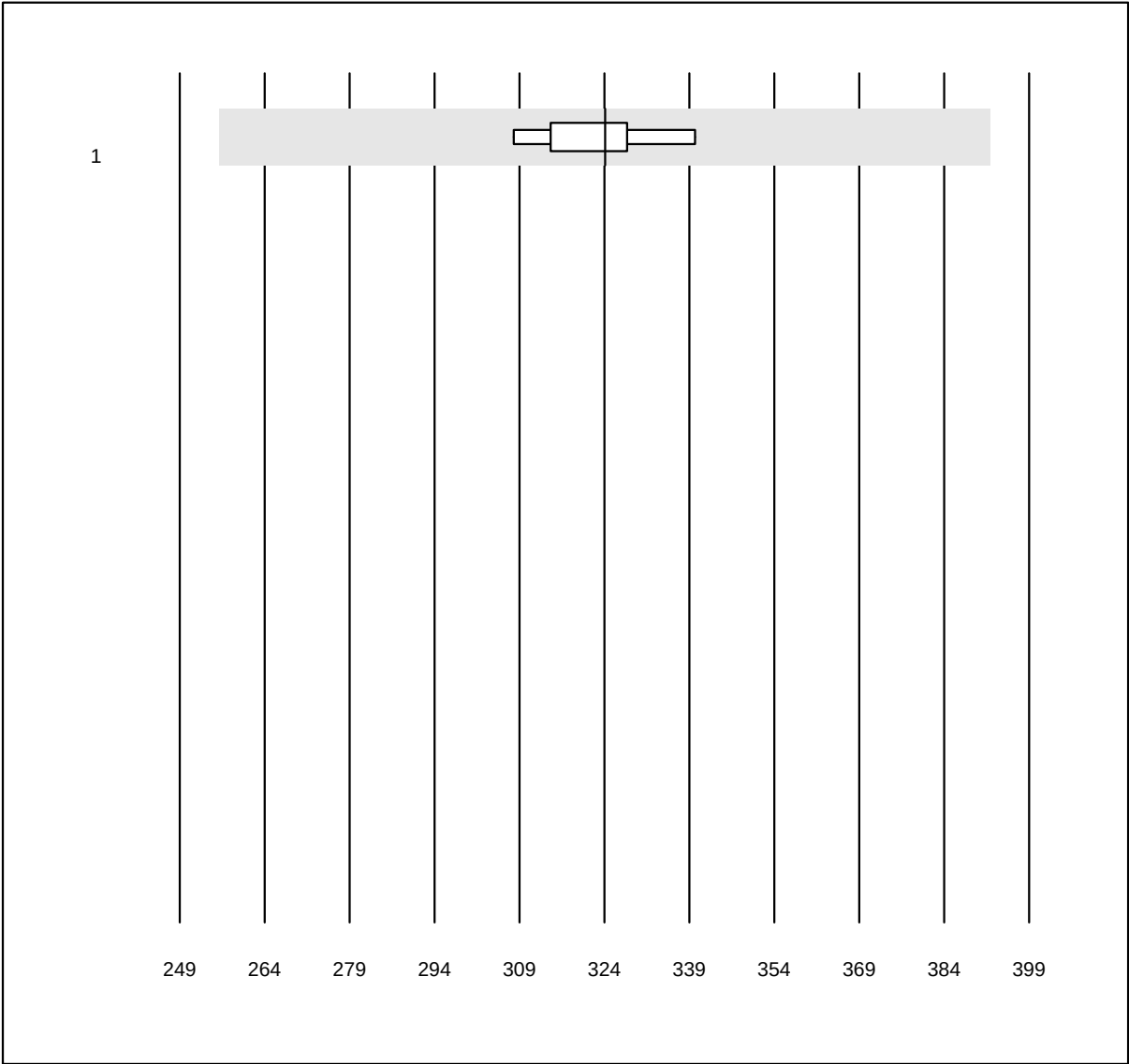


QUALAB Toleranz: 21%

Ammoniaca (µmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	10	90.0	0.0	10.0	324.1	3.0	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Etanolo

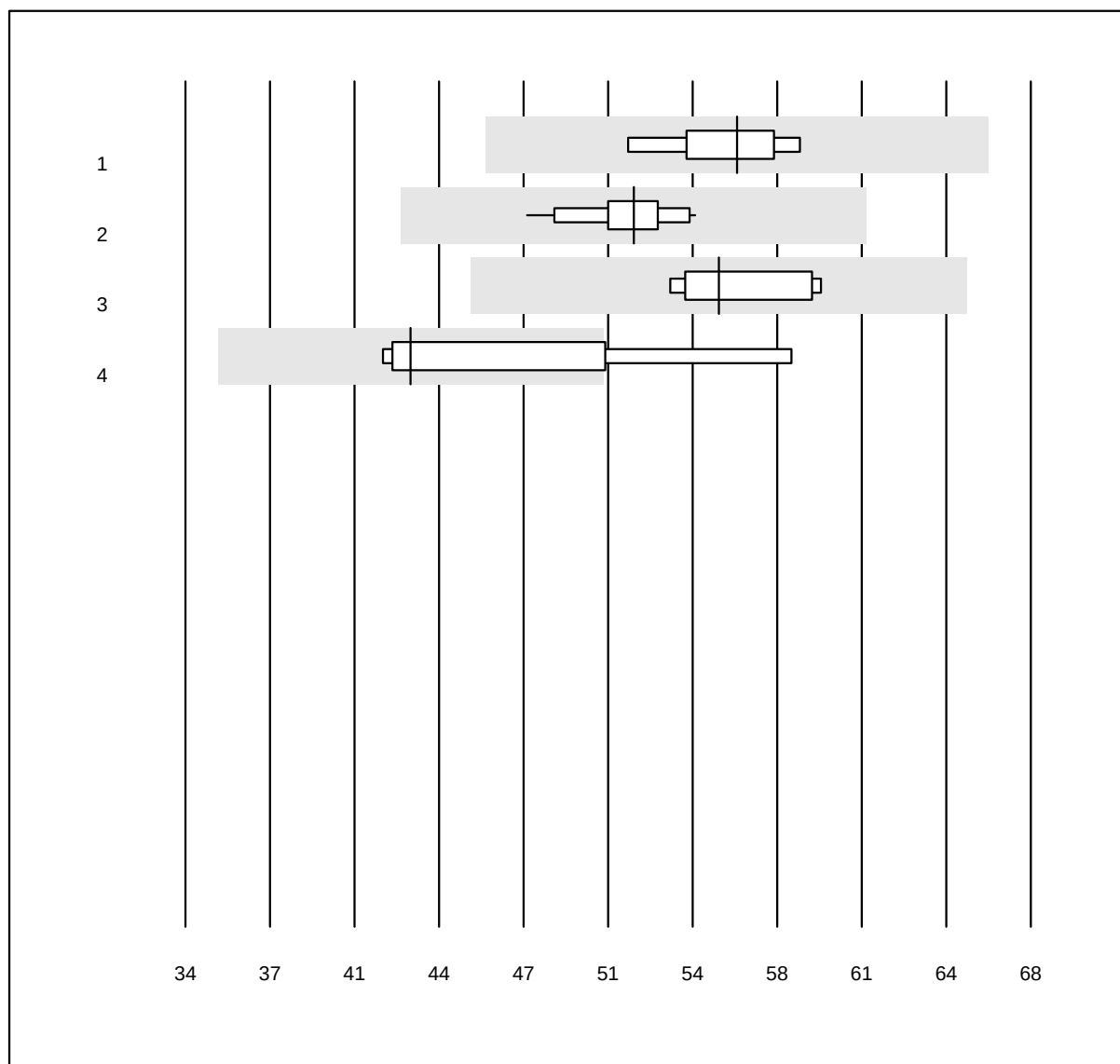


QUALAB Toleranz: 18%

Etanolo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	56.2	3.6	e
2 Roche	28	96.4	0.0	3.6	52.0	3.4	e
3 Siemens	8	87.5	0.0	12.5	55.5	4.2	e
4 Altri	4	75.0	25.0	0.0	43.1	11.7	e*

Calprotectina

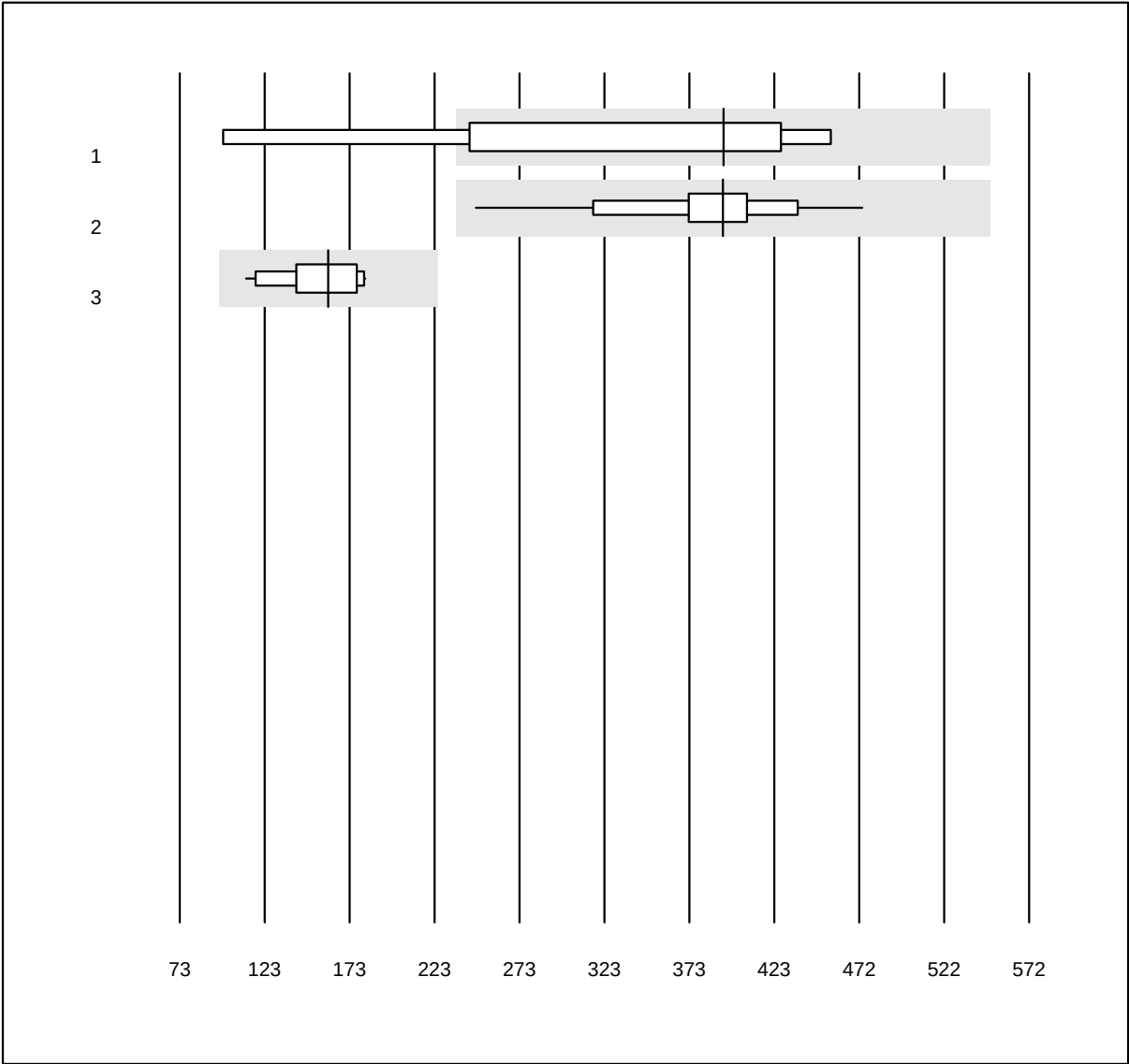


MQ Toleranz: 40%

Calprotectina (µg/g)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Bhlmann Quantum Blue	4	75.0	25.0	0.0	393	30.5	e*
2 Bhlmann fCALturbo	23	95.7	0.0	4.3	392	12.0	e
3 Liaison	16	100.0	0.0	0.0	160	14.0	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Colesterolo Af/b101

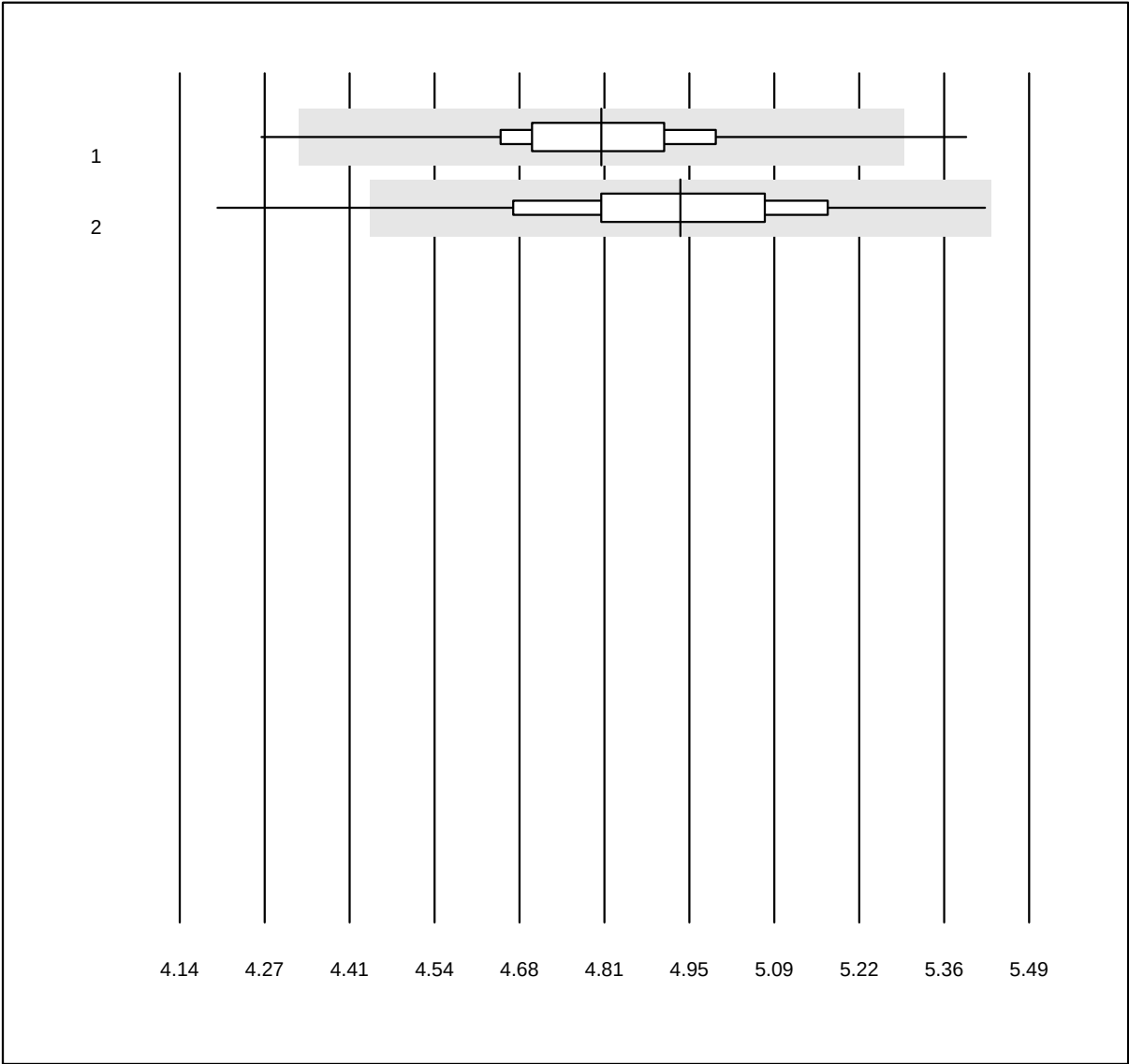


QUALAB Toleranz: 10%

Colesterolo Af/b101
(mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Cobas b101/Click	369	98.6	0.8	0.5	4.81	2.8	e
2 Afinion	514	98.4	0.6	1.0	4.94	3.8	e


HDL-Colesterolo Af/b101

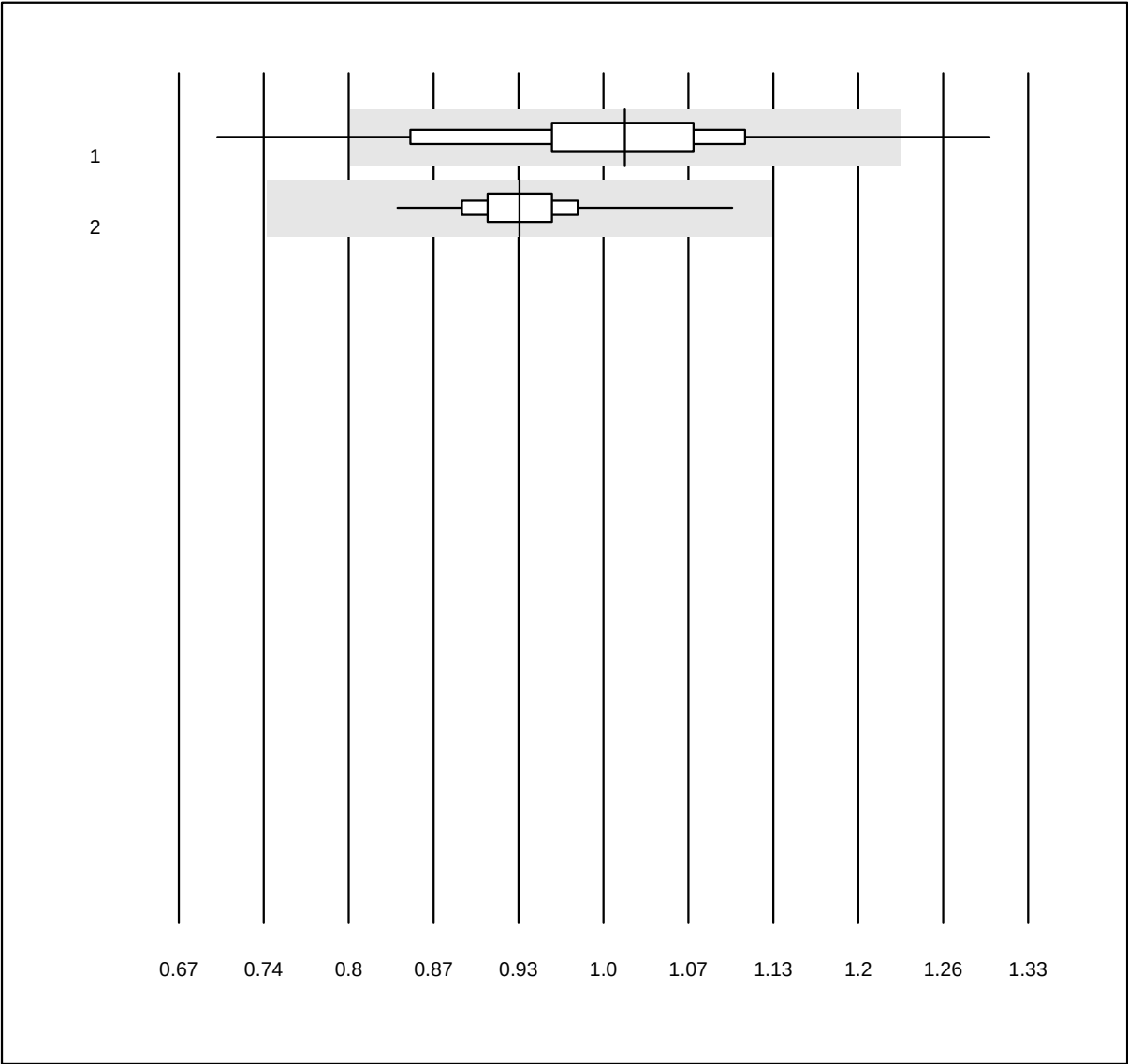

QUALAB Toleranz: 21%

		HDL-Colesterolo Af/b101 (mmol/l)						
No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas b101/Click	367	92.6	4.4	3.0	1.02	9.9	e
2	Afinion	514	97.1	0.0	2.9	0.93	3.9	e

Trigliceridi Af/b101

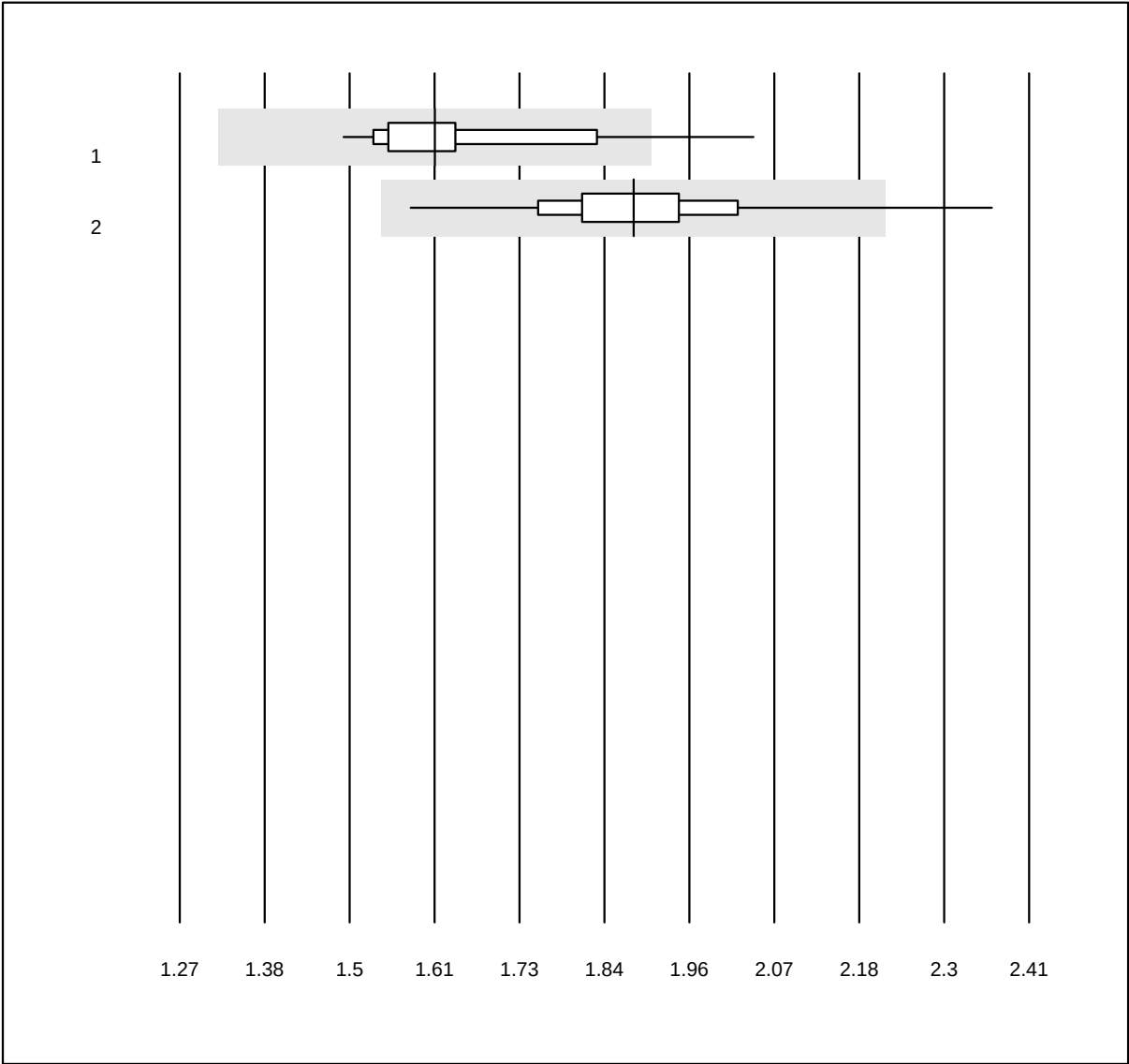


QUALAB Toleranz: 18%

Trigliceridi Af/b101 (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Cobas b101/Click	367	93.7	3.3	3.0	1.61	7.0	e
2 Afinion	515	98.1	1.0	1.0	1.88	6.0	e

Troponina I AFIAS

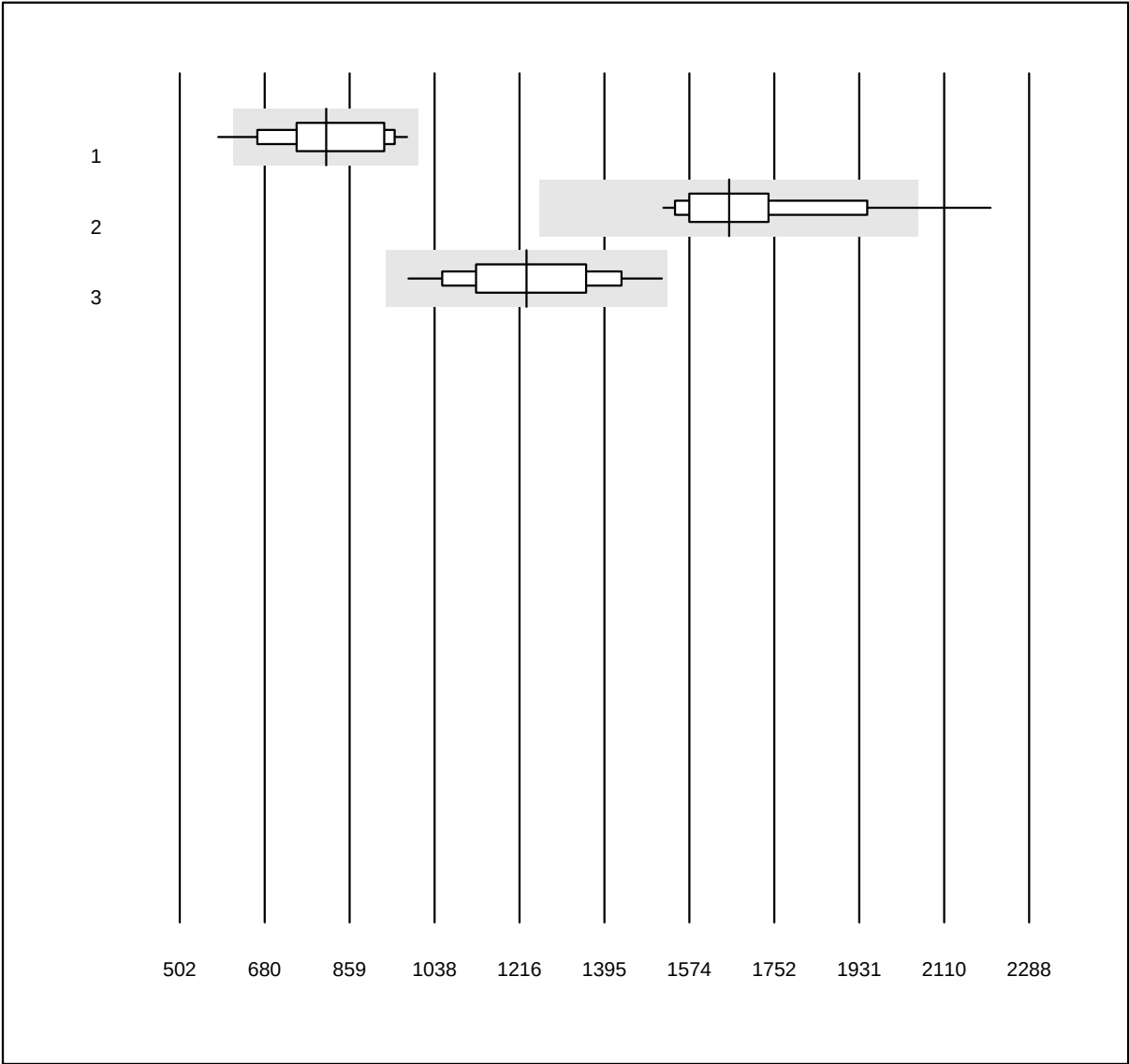


QUALAB Toleranz: 24%

Troponina I AFIAS (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Afias (Lot-Gen 1)	131	97.7	2.3	0.0	810.00	12.9	a
2 Afias (Lot-Gen 2)	87	94.3	3.4	2.3	1657.28	9.1	e
3 AFIAS	487	92.2	0.0	7.8	1231.28	11.2	e

NT-proBNP AFIAS

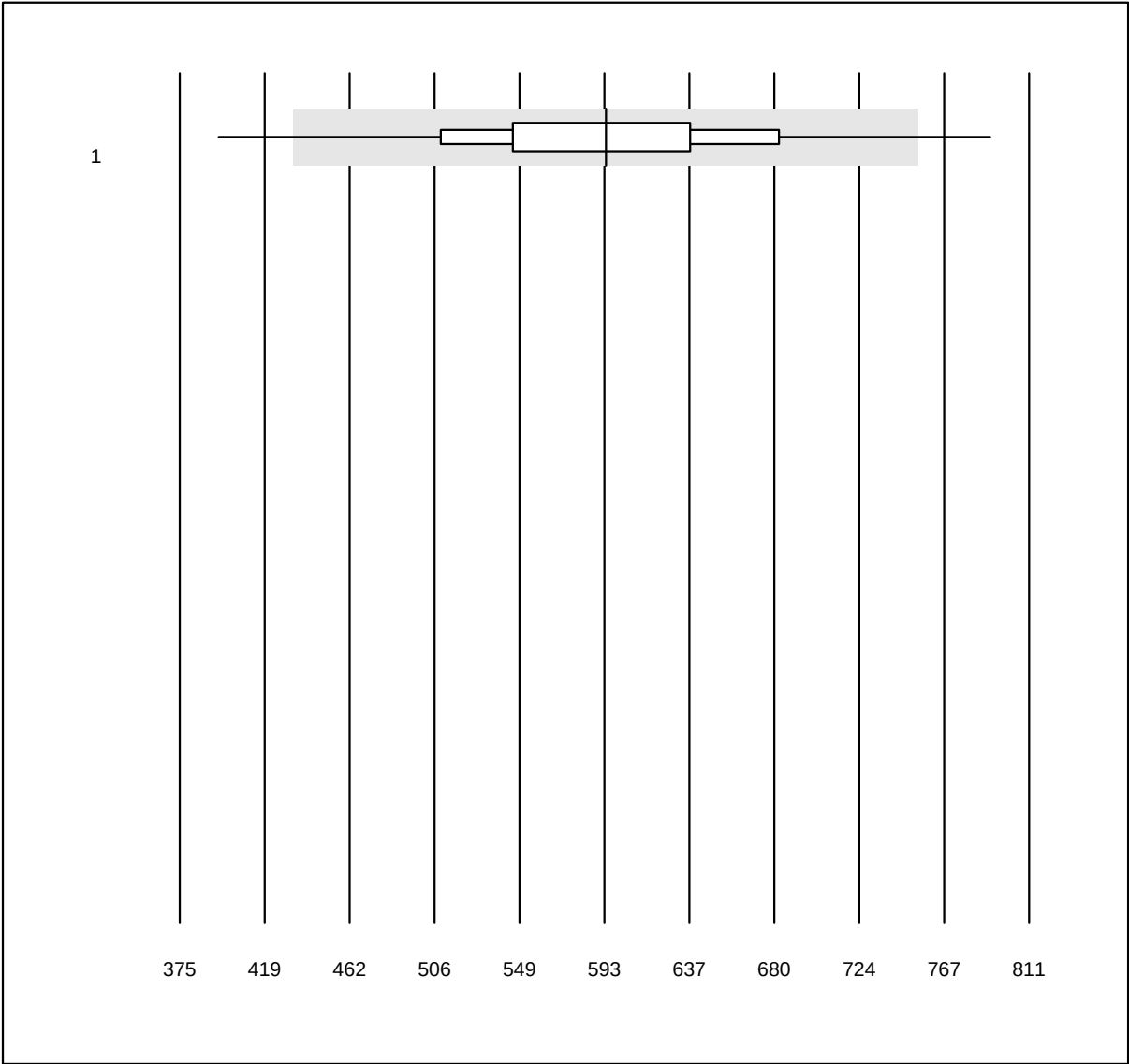


QUALAB Toleranz: 27%

NT-proBNP AFIAS (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	AFIAS	549	94.0	2.7	3.3	593.8	11.3	e

Omocisteina

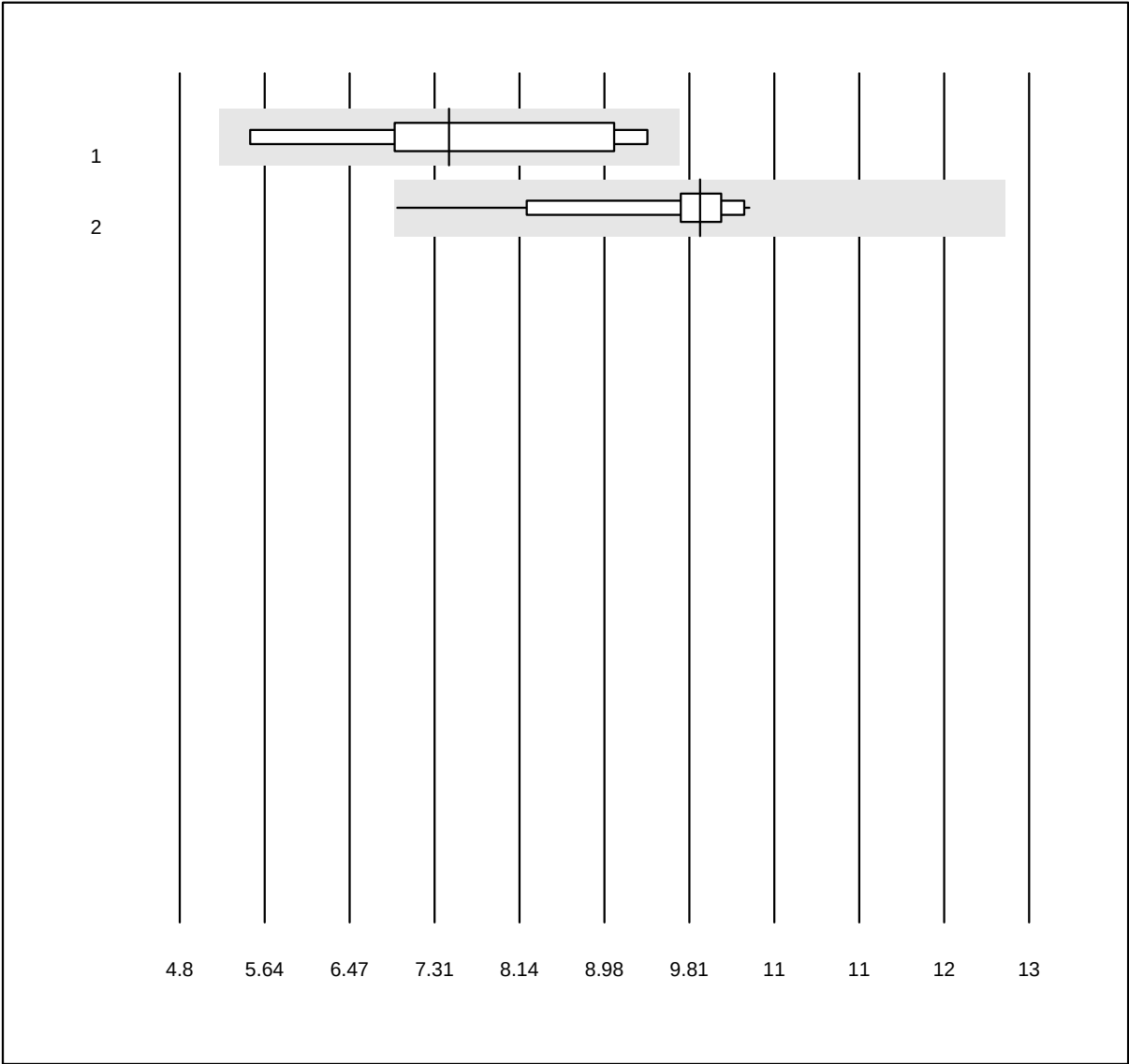


MQ Toleranz: 30%

Omocisteina (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	7.4	16.4	e*
2 Roche	14	100.0	0.0	0.0	9.8	8.6	e

Bicarbonato

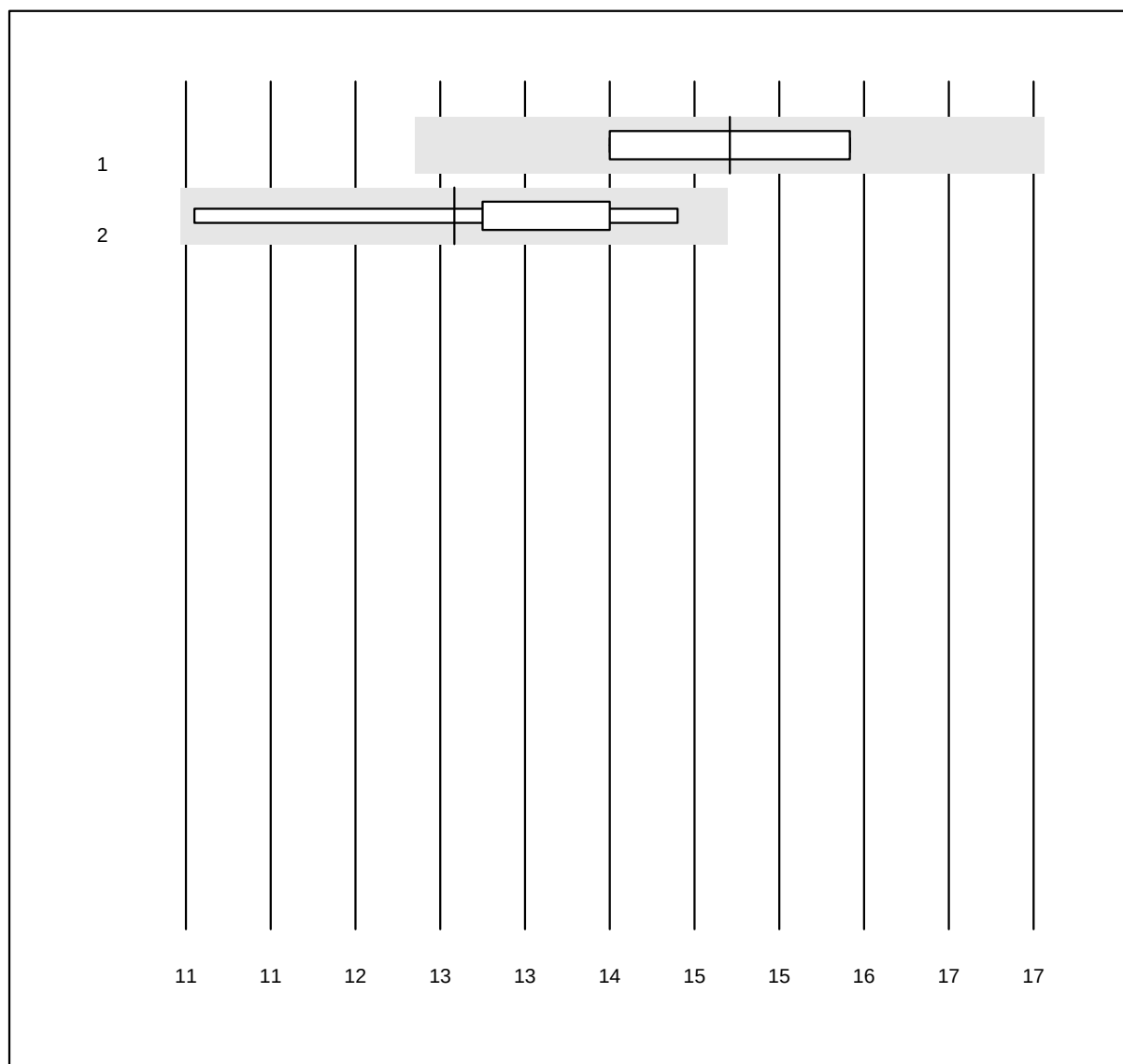


MQ Toleranz: 15%

Bicarbonato (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	14.8	6.6	e*
2 Roche	7	100.0	0.0	0.0	12.9	7.4	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Fruttosamina

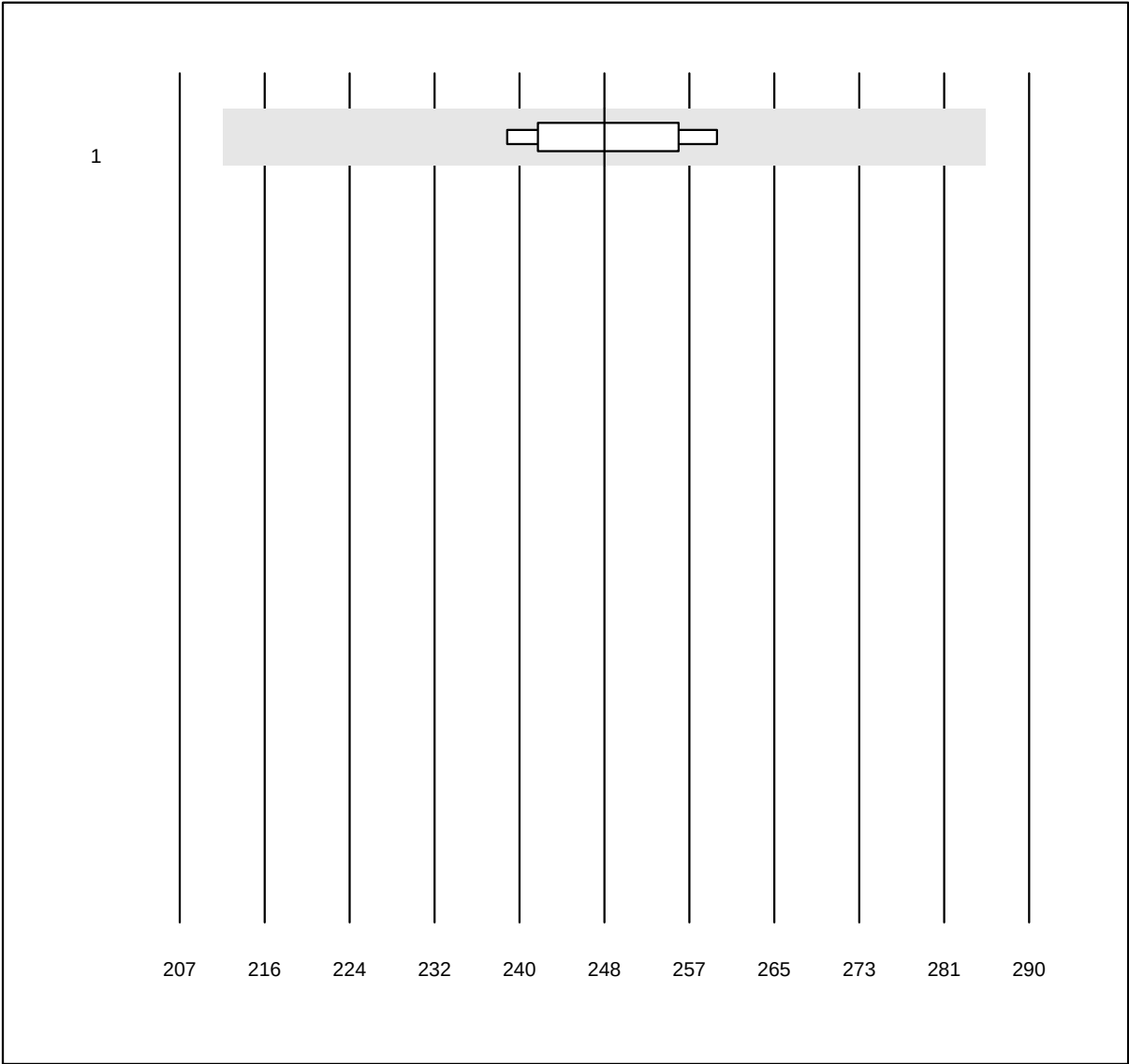


MQ Toleranz: 15%

Fruttosamina (μmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	249	2.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Lipasi

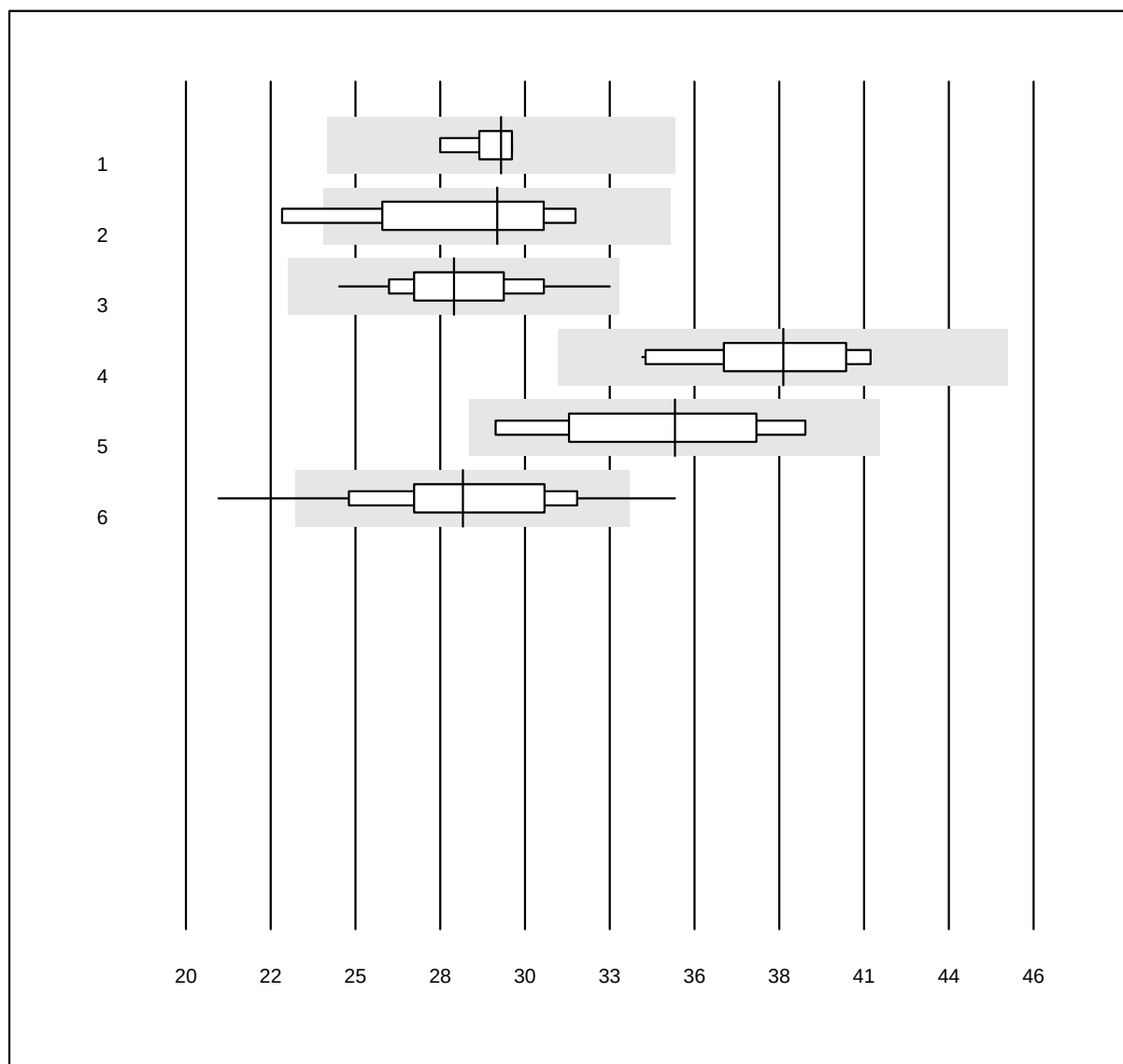


QUALAB Toleranz: 18%

Lipasi (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	29.7	2.7	e
2 Beckman	4	100.0	0.0	0.0	29.6	9.4	e*
3 Roche	40	100.0	0.0	0.0	28.2	6.7	e
4 Siemens	10	100.0	0.0	0.0	38.3	6.4	e
5 Autolyser	4	100.0	0.0	0.0	35.0	8.6	e*
6 Fuji Dri-Chem	121	83.5	7.4	9.1	28.5	10.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Lipasi Vitros

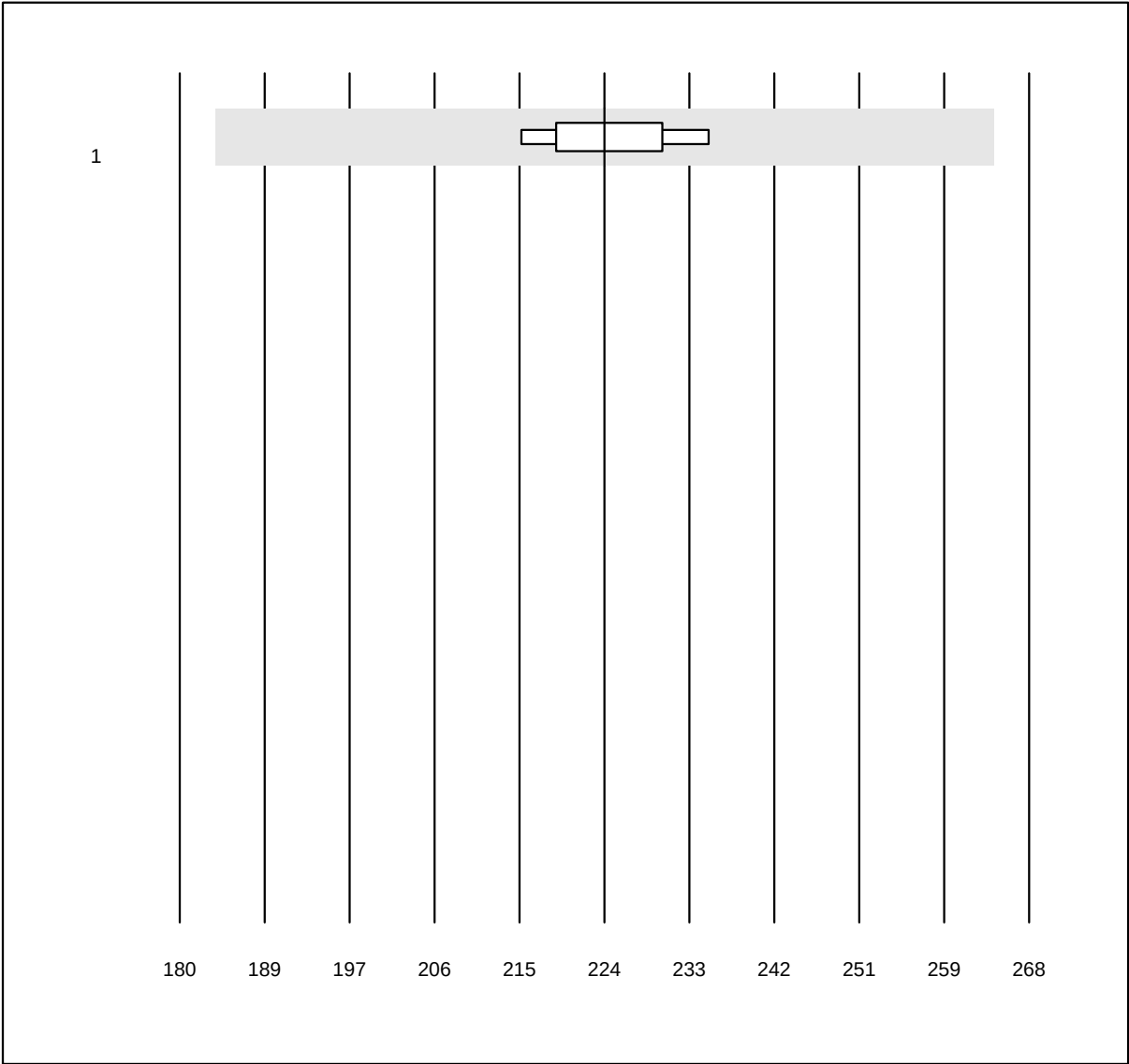


QUALAB Toleranz: 18%

Lipasi Vitros (U/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Vitros	7	100.0	0.0	0.0	224.0	2.8	e

Albumina CSF

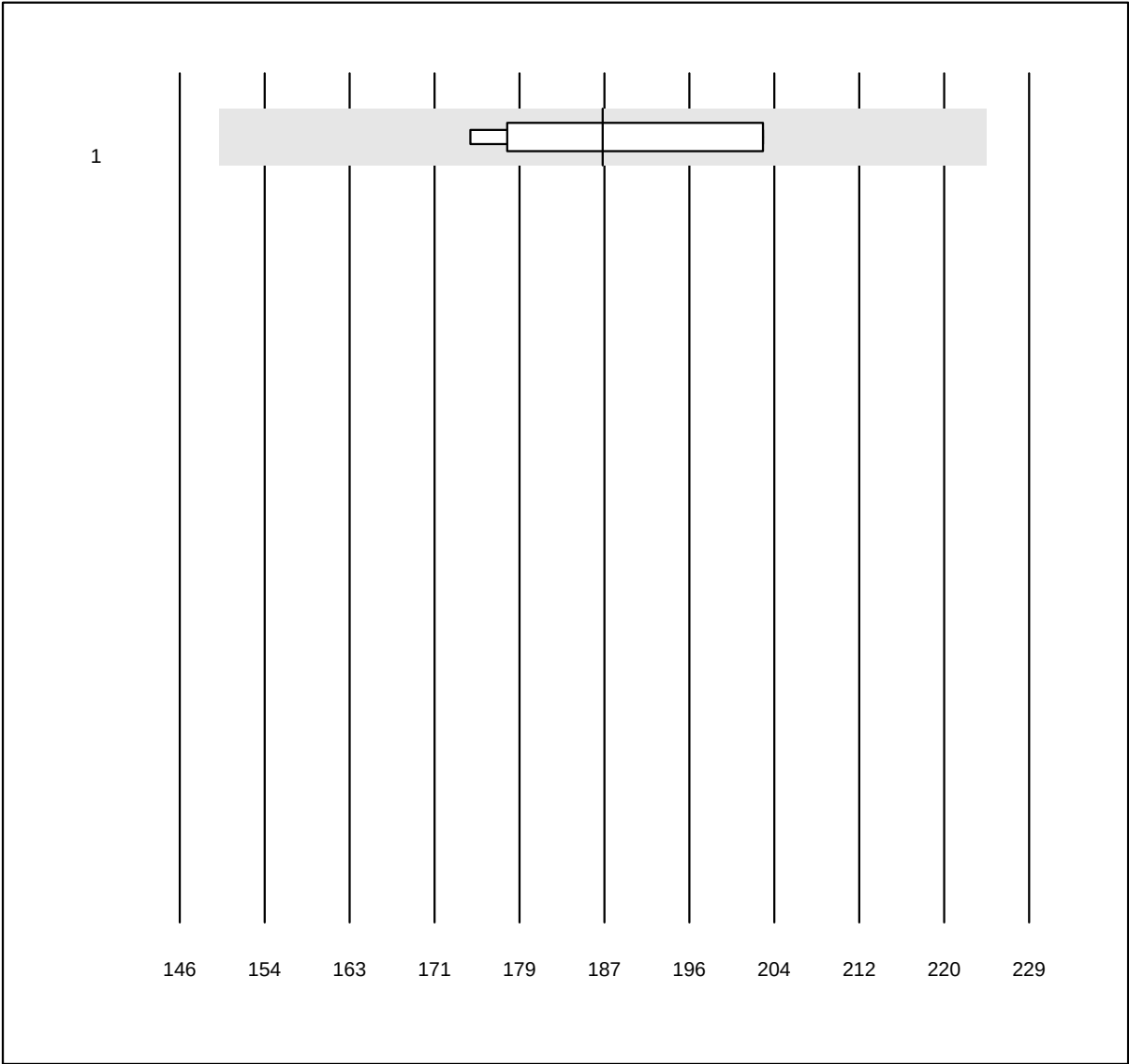


MQ Toleranz: 20%

Albumina CSF (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	7	100.0	0.0	0.0	187.33	6.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Glucosio CSF

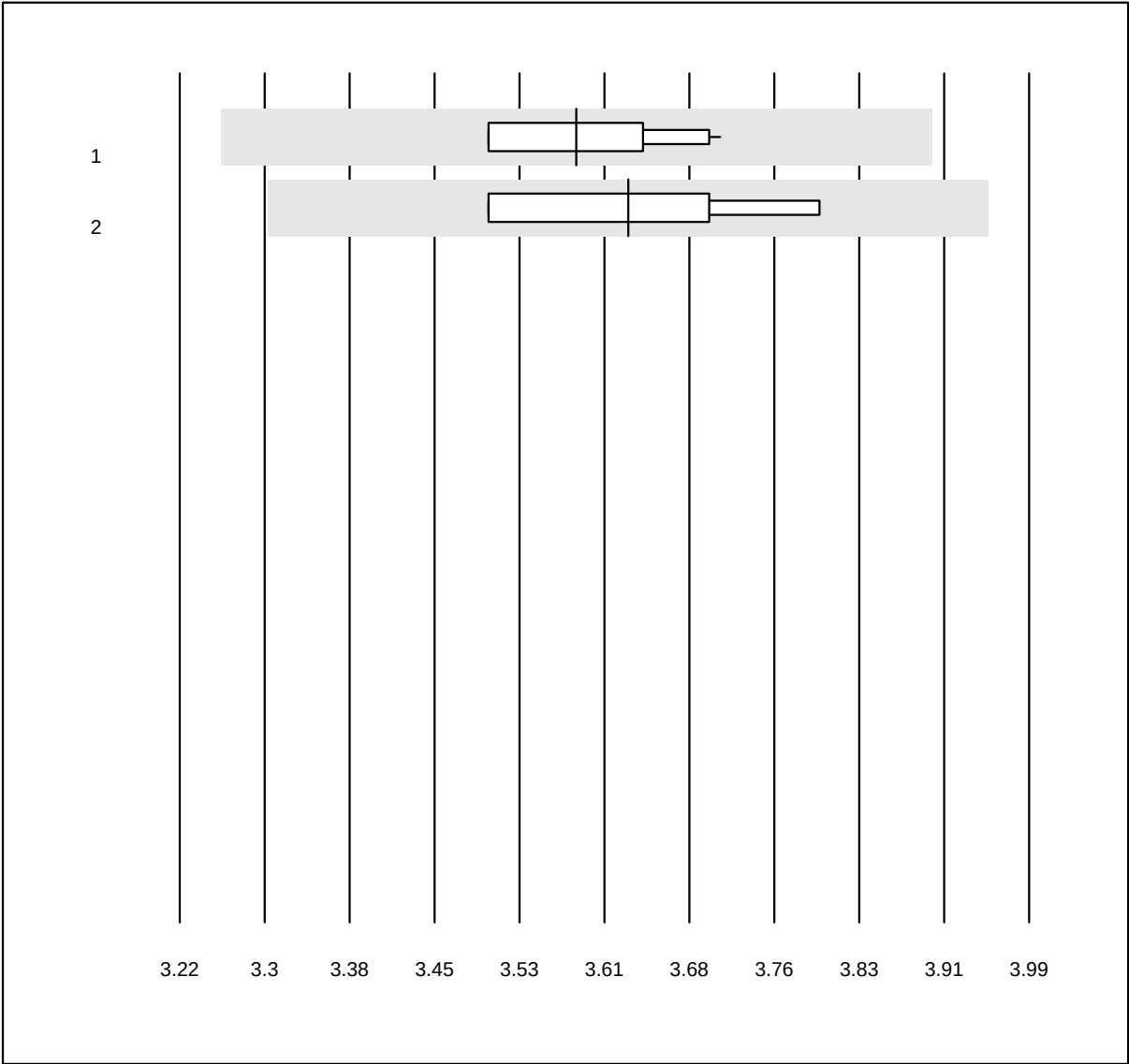


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio CSF (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	23	100.0	0.0	0.0	3.58	2.1	e
2 altri metodi	15	100.0	0.0	0.0	3.63	2.8	e

Lattato CSF

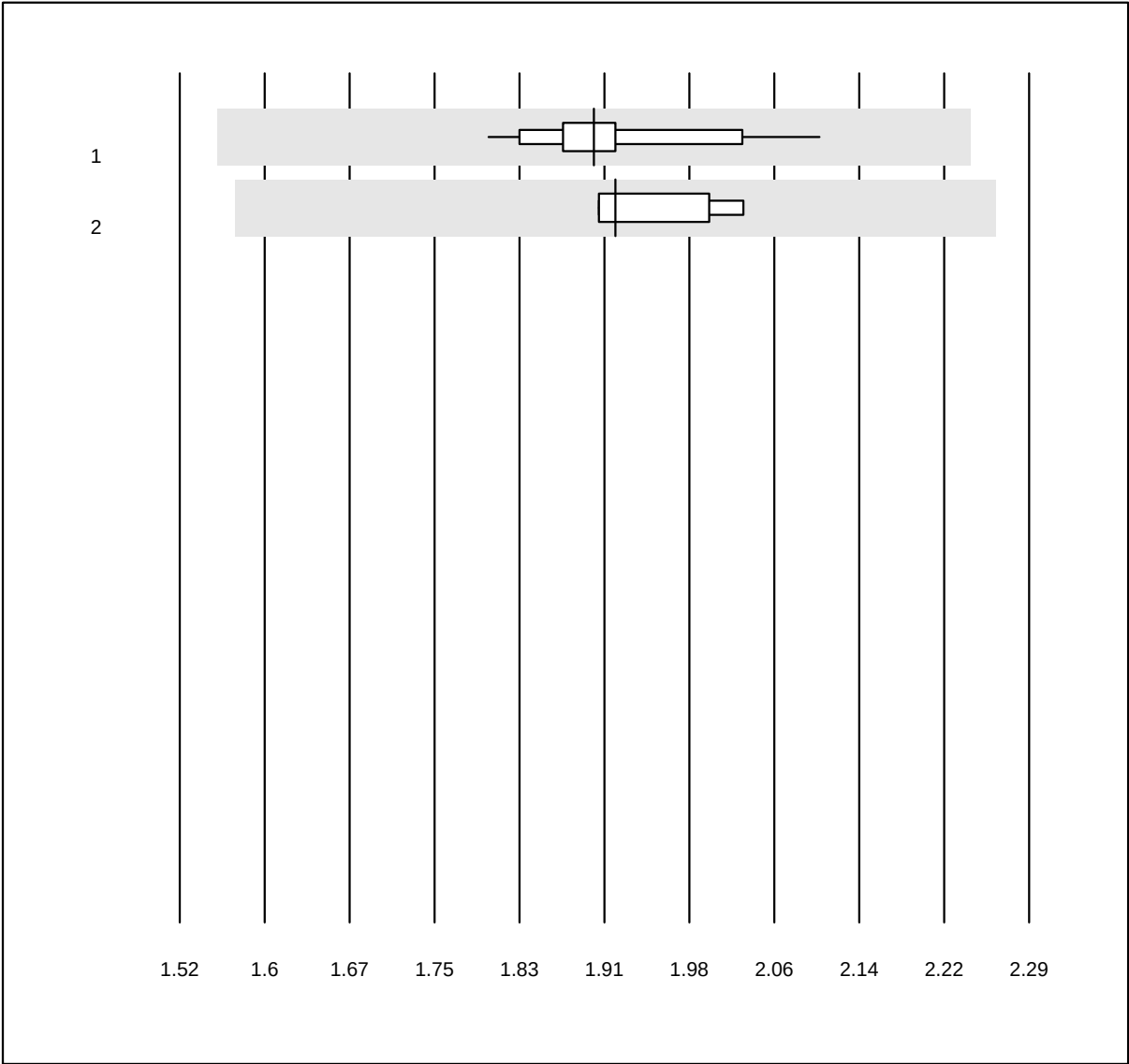


QUALAB Toleranz: 18%

Lattato CSF (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	16	100.0	0.0	0.0	1.90	3.6	e
2 altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	1.92	2.8	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

LDH CSF

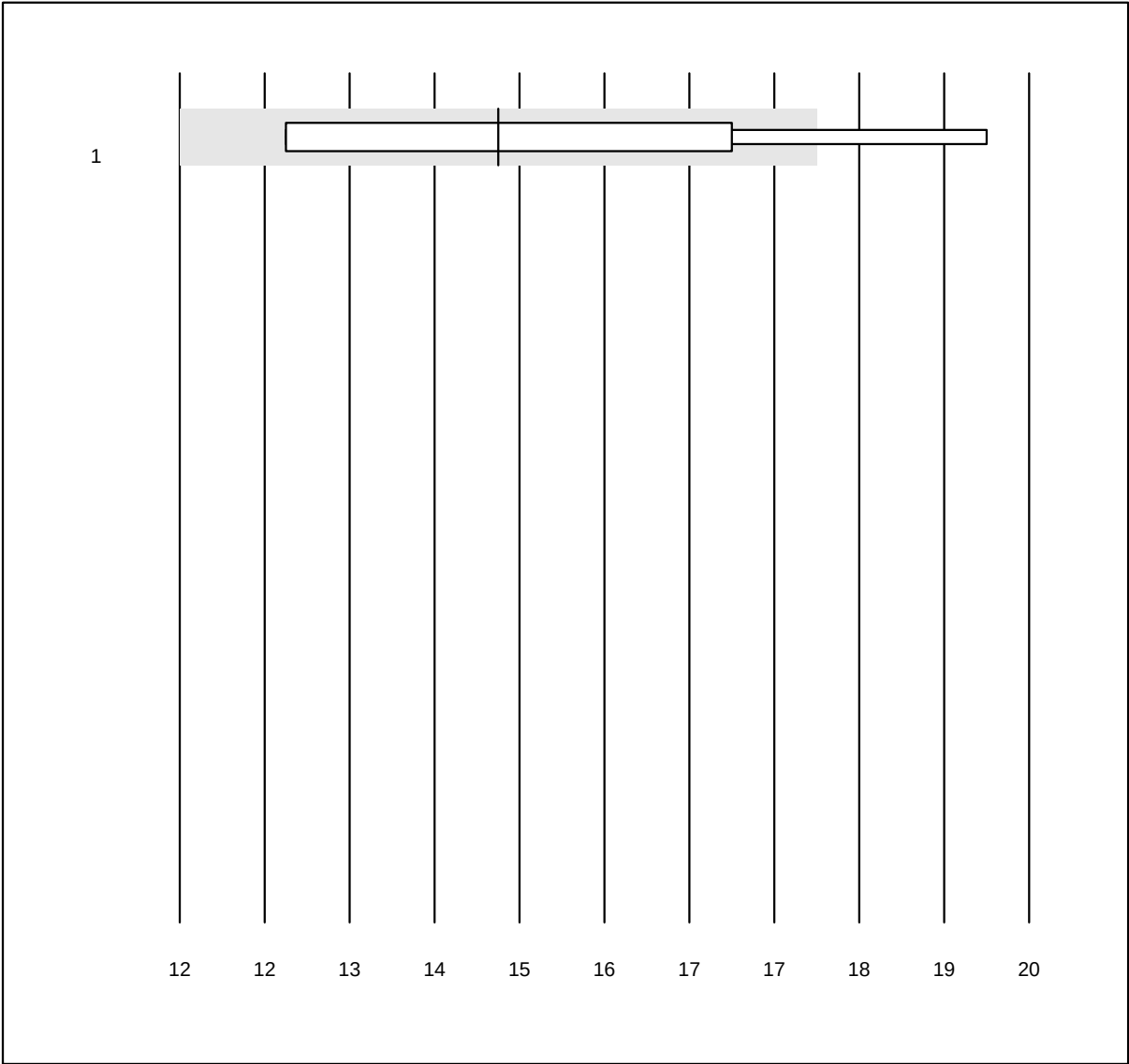


MQ Toleranz: 20%

LDH CSF (U/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	15	16.0	a*

Proteine CSF

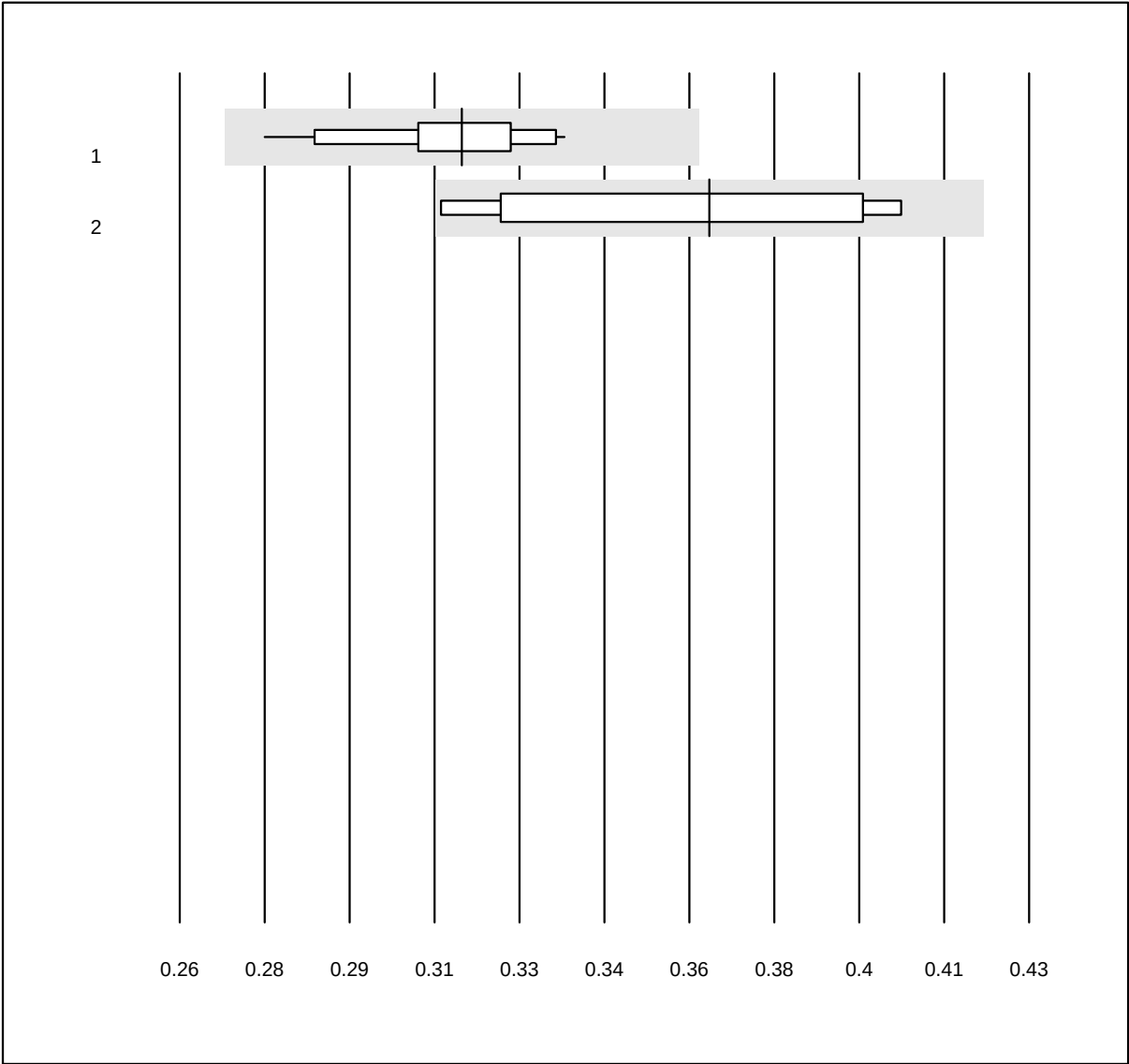


QUALAB Toleranz: 15%

Proteine CSF (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	26	100.0	0.0	0.0	0.32	5.0	e
2	altri metodi	8	100.0	0.0	0.0	0.37	10.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CDT

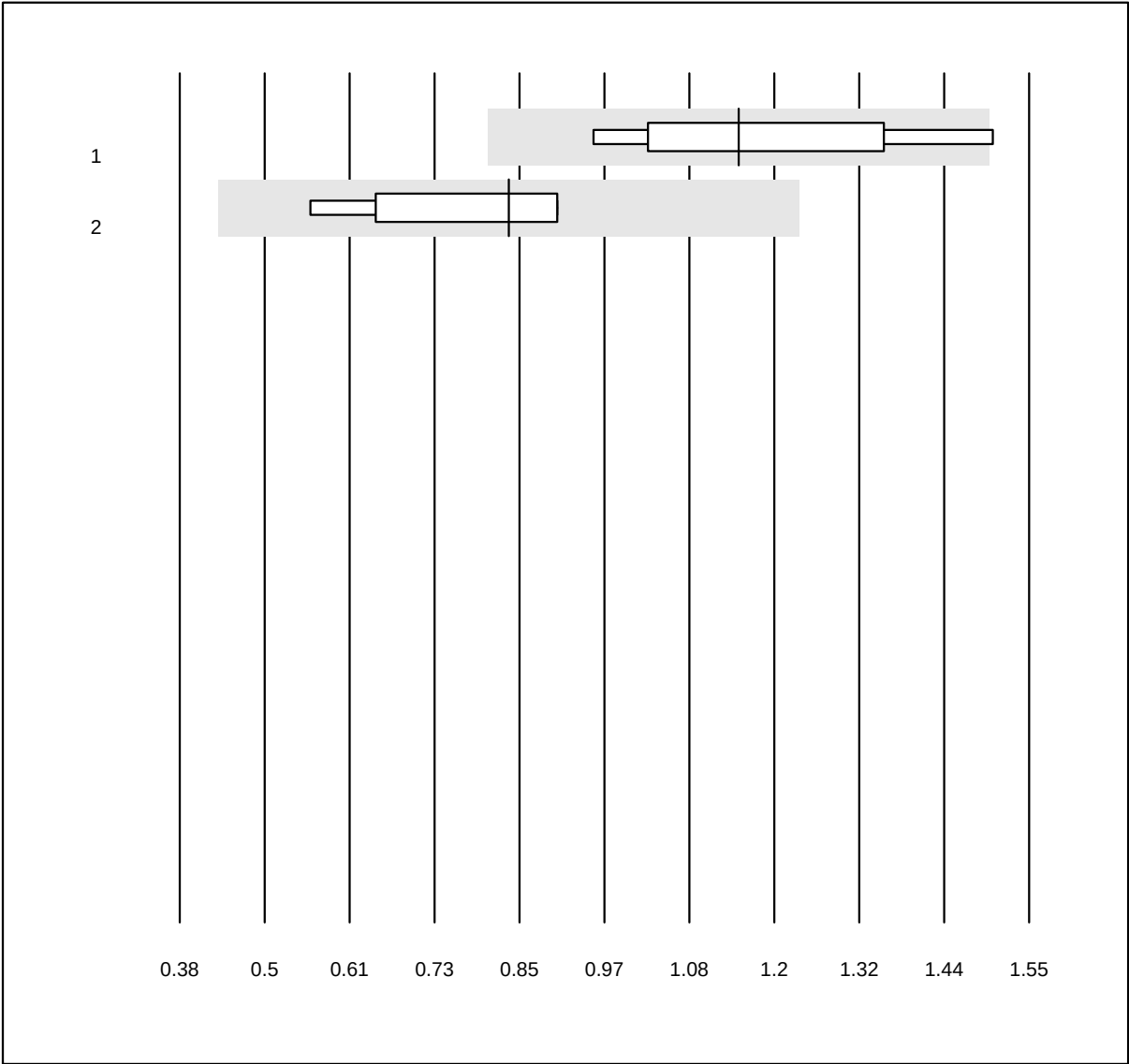


MQ Toleranz: 30%

CDT (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Immunoassay	4	100.0	0.0	0.0	1.1	14.5	e*
2 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	0.8	17.7	e*

Everolimus

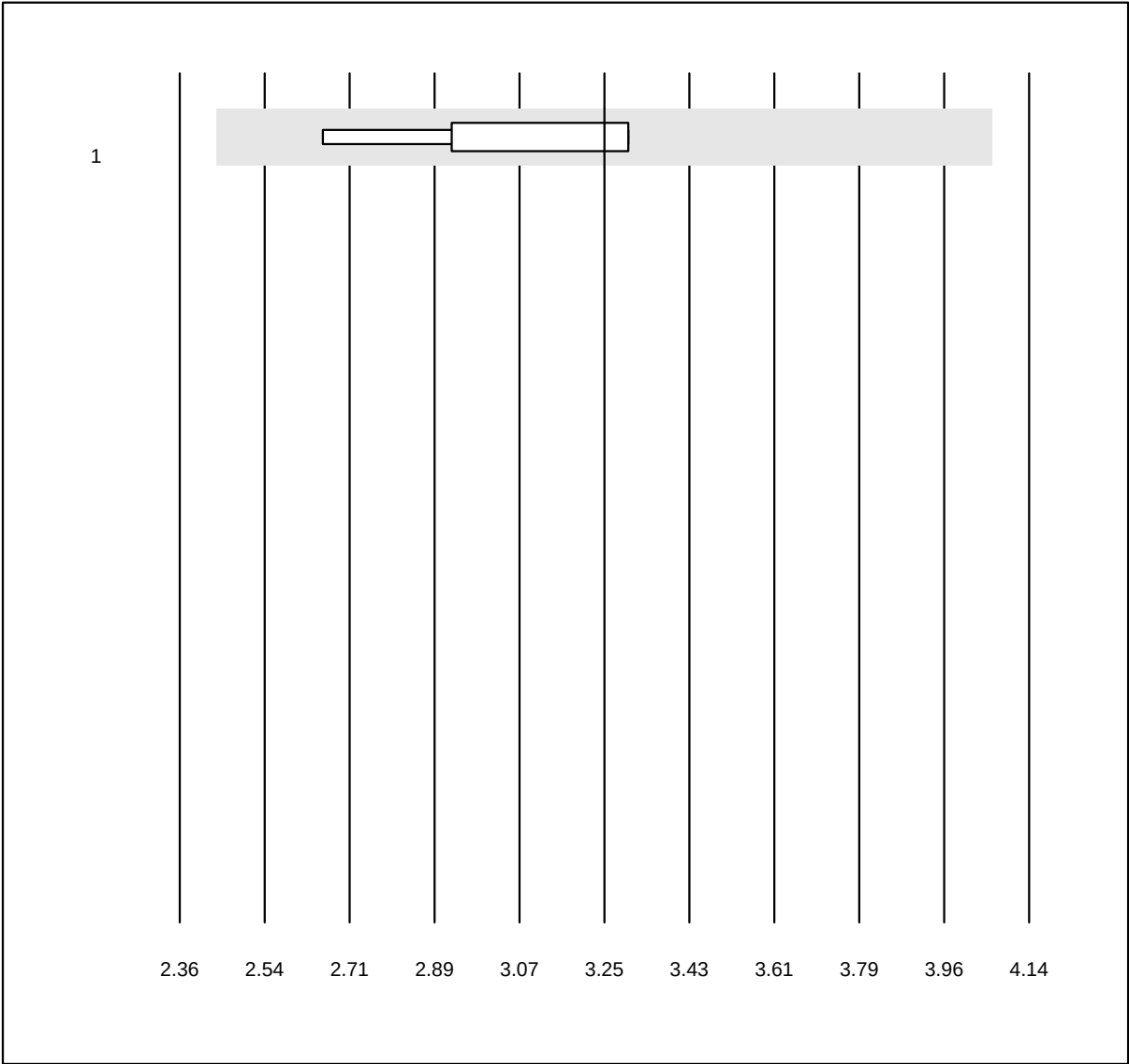


MQ Toleranz: 25%

Everolimus (μg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	3.3	6.9	e*

Sirolimus

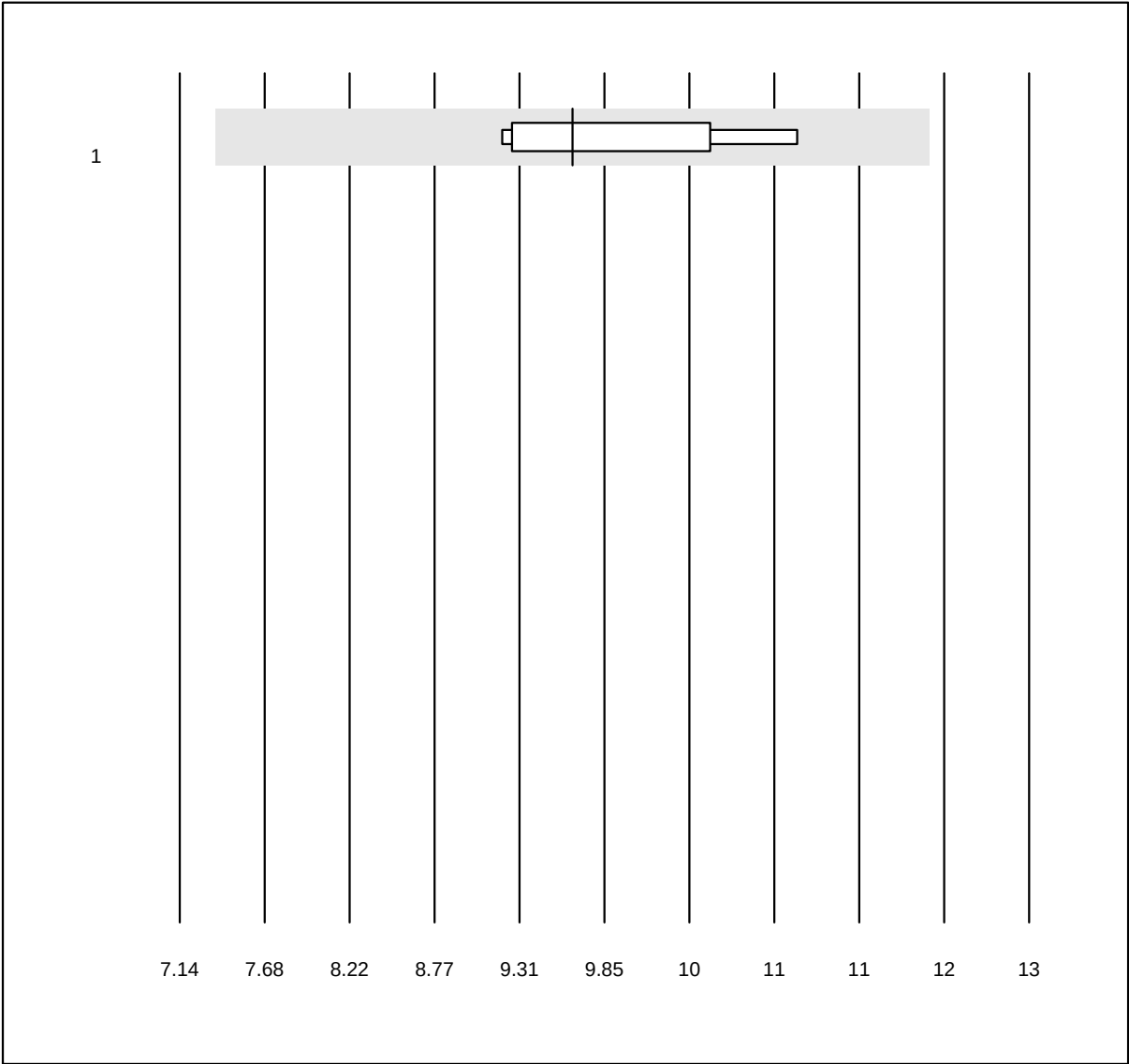


MQ Toleranz: 25%

Sirolimus (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	4	100.0	0.0	0.0	9.8	7.4	e*

Tacrolimus

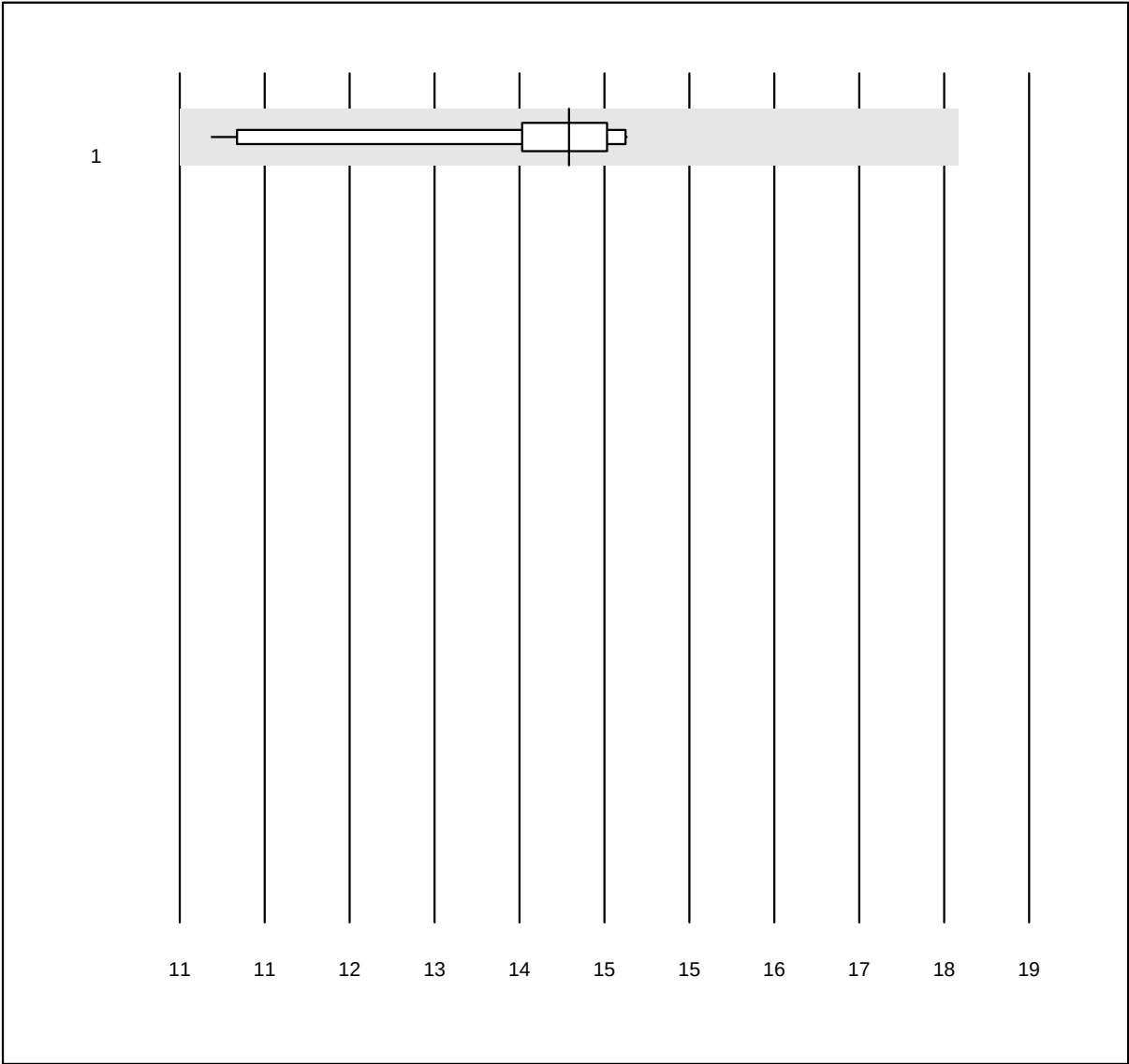


MQ Toleranz: 25%

Tacrolimus (µg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	10	100.0	0.0	0.0	14.7	8.1	e

Proteina E totale

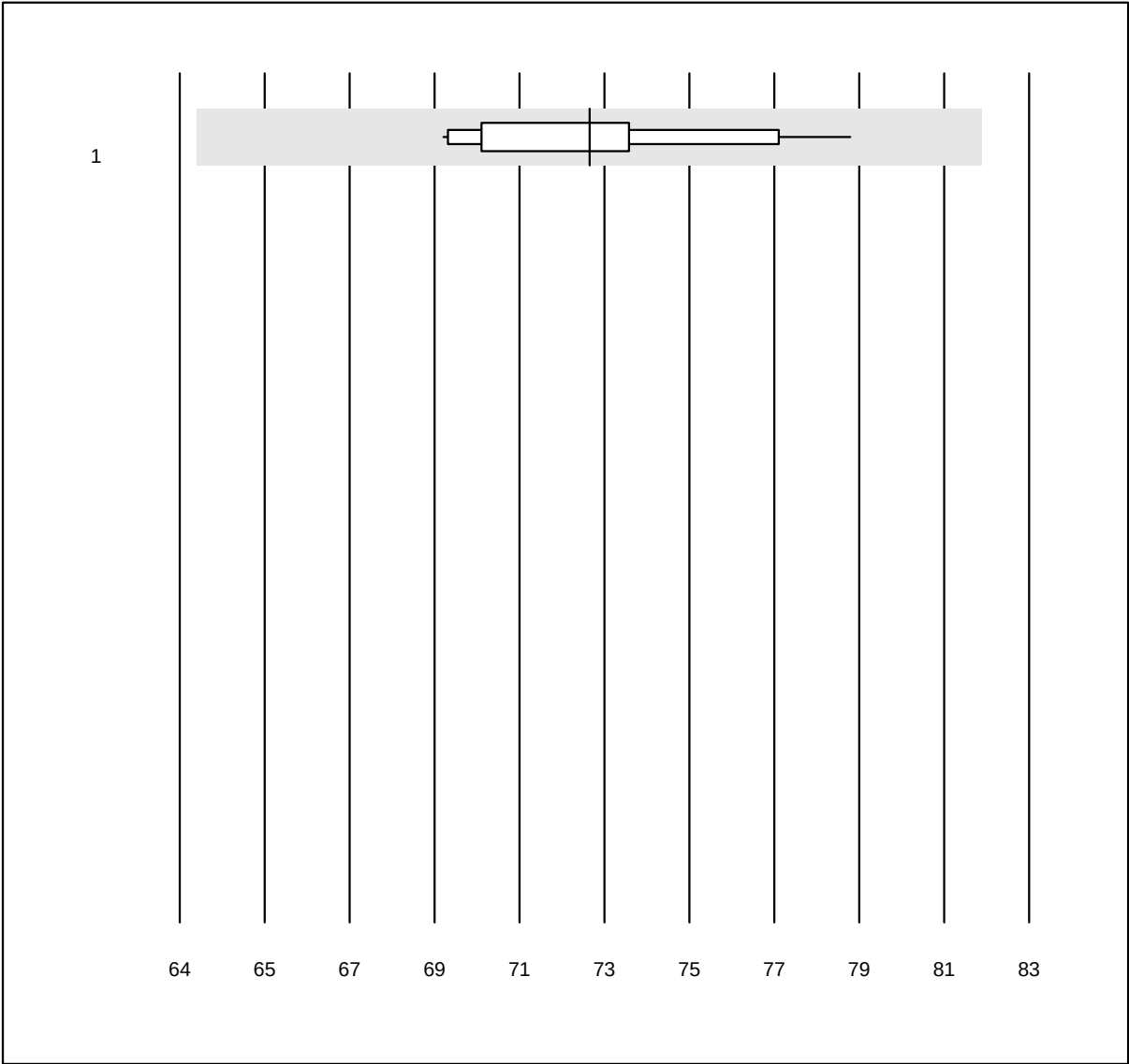


MQ Toleranz: 12%

Proteina E totale (g/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	23	95.7	0.0	4.3	73.2	3.4	e

albumina E

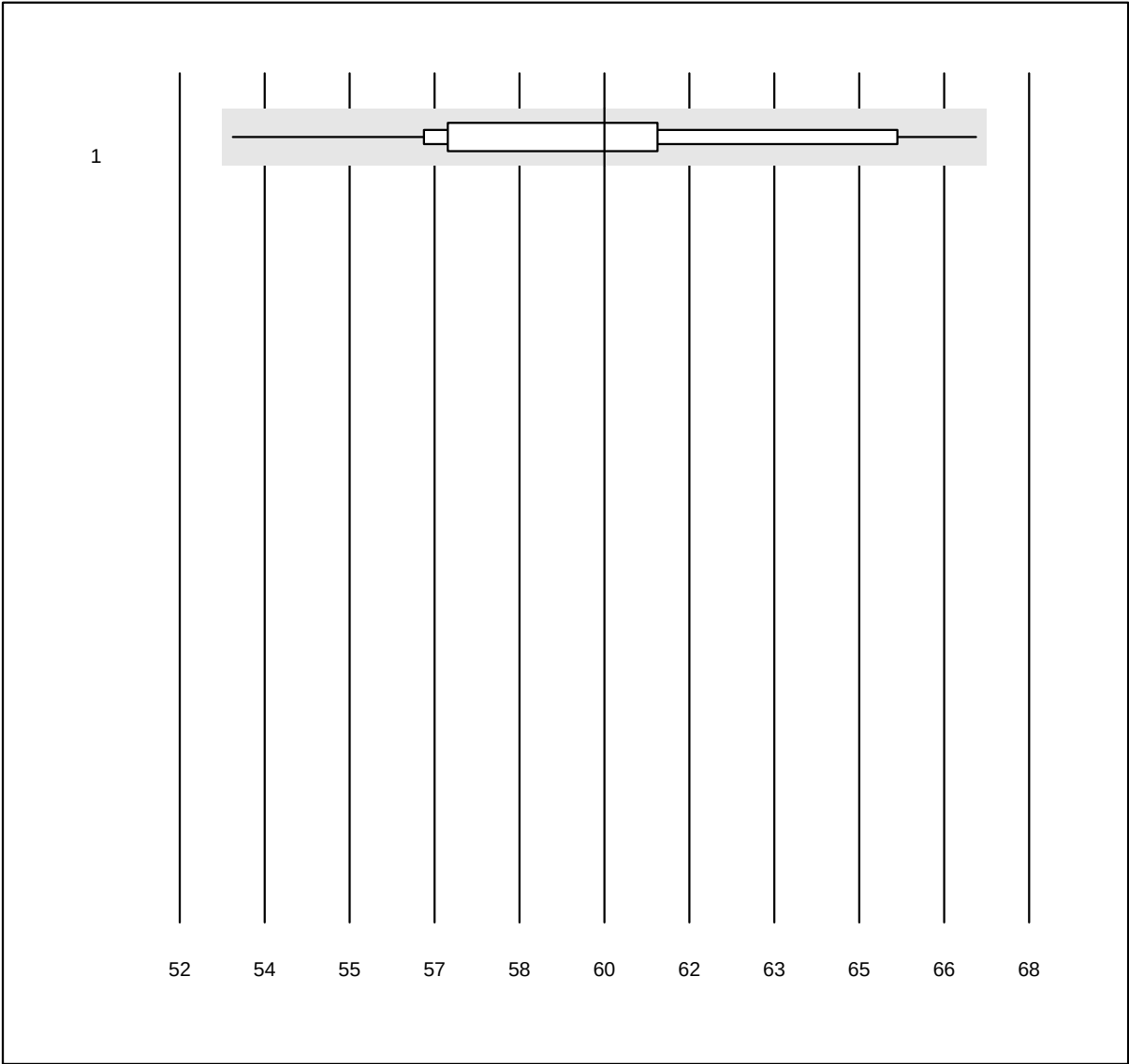


MQ Toleranz: 12%

albumina E (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	37	100.0	0.0	0.0	60.0	5.8	a

alfa-1-globuline

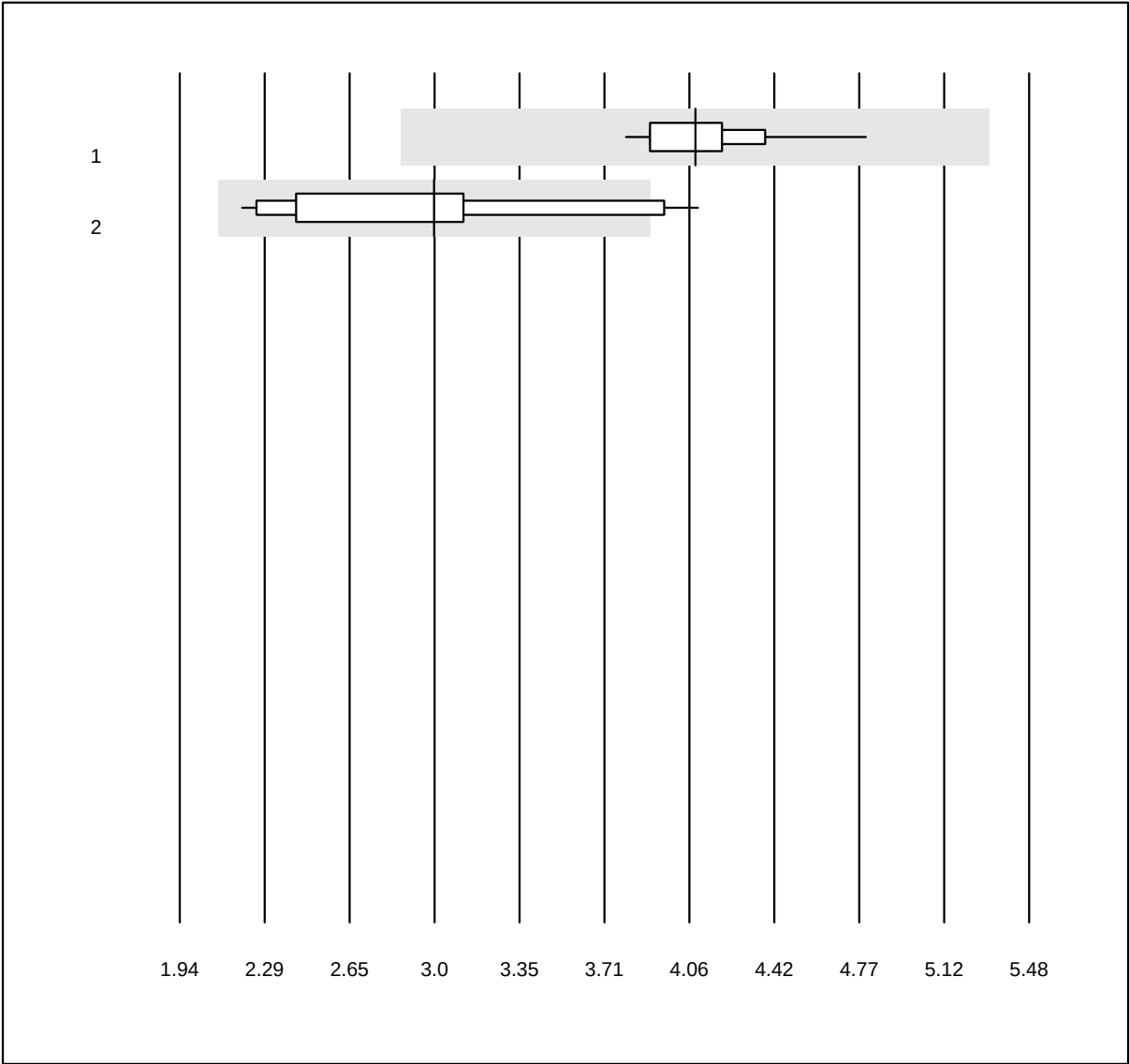


MQ Toleranz: 30%

alfa-1-globuline (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Elettroforesi capillare	25	100.0	0.0	0.0	4.1	5.3	e
2 Elettroforesi	12	91.7	8.3	0.0	3.0	19.8	a*

alfa-2-globuline

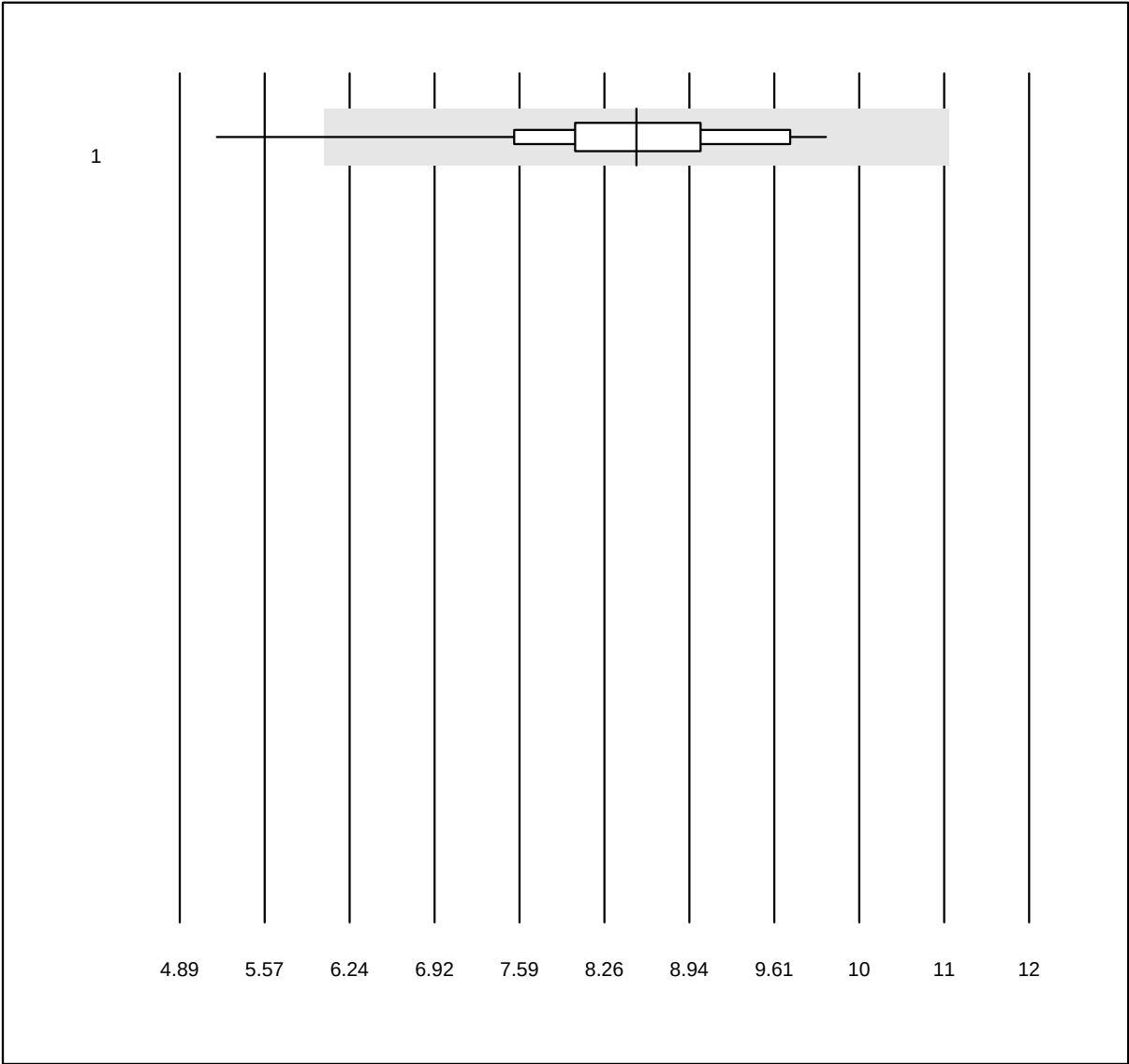


MQ Toleranz: 30%

alfa-2-globuline (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	37	94.6	2.7	2.7	8.7	11.6	e

beta-globuline

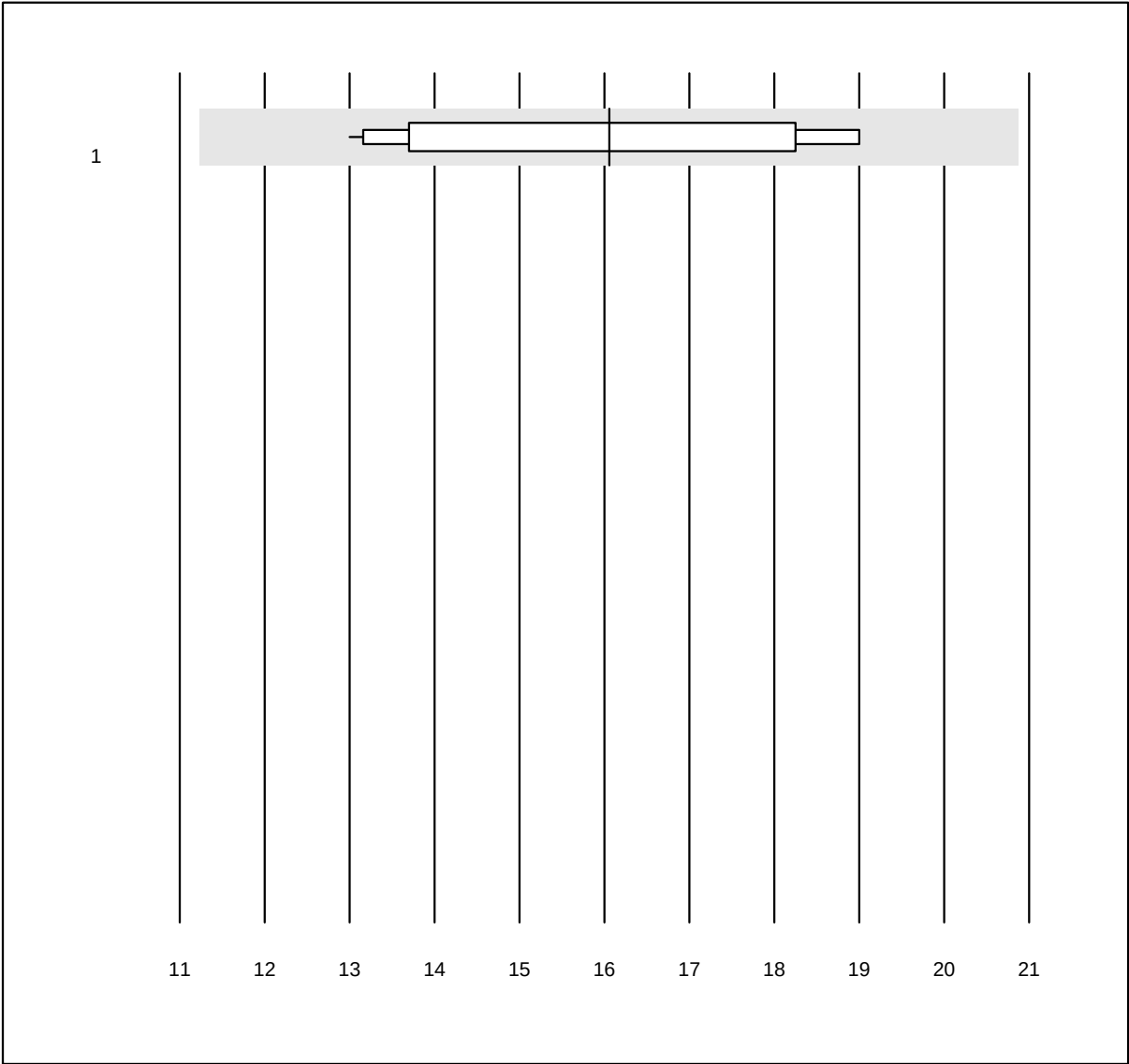


MQ Toleranz: 30%

beta-globuline (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	17	100.0	0.0	0.0	16.1	14.4	e

Beta globulina 1

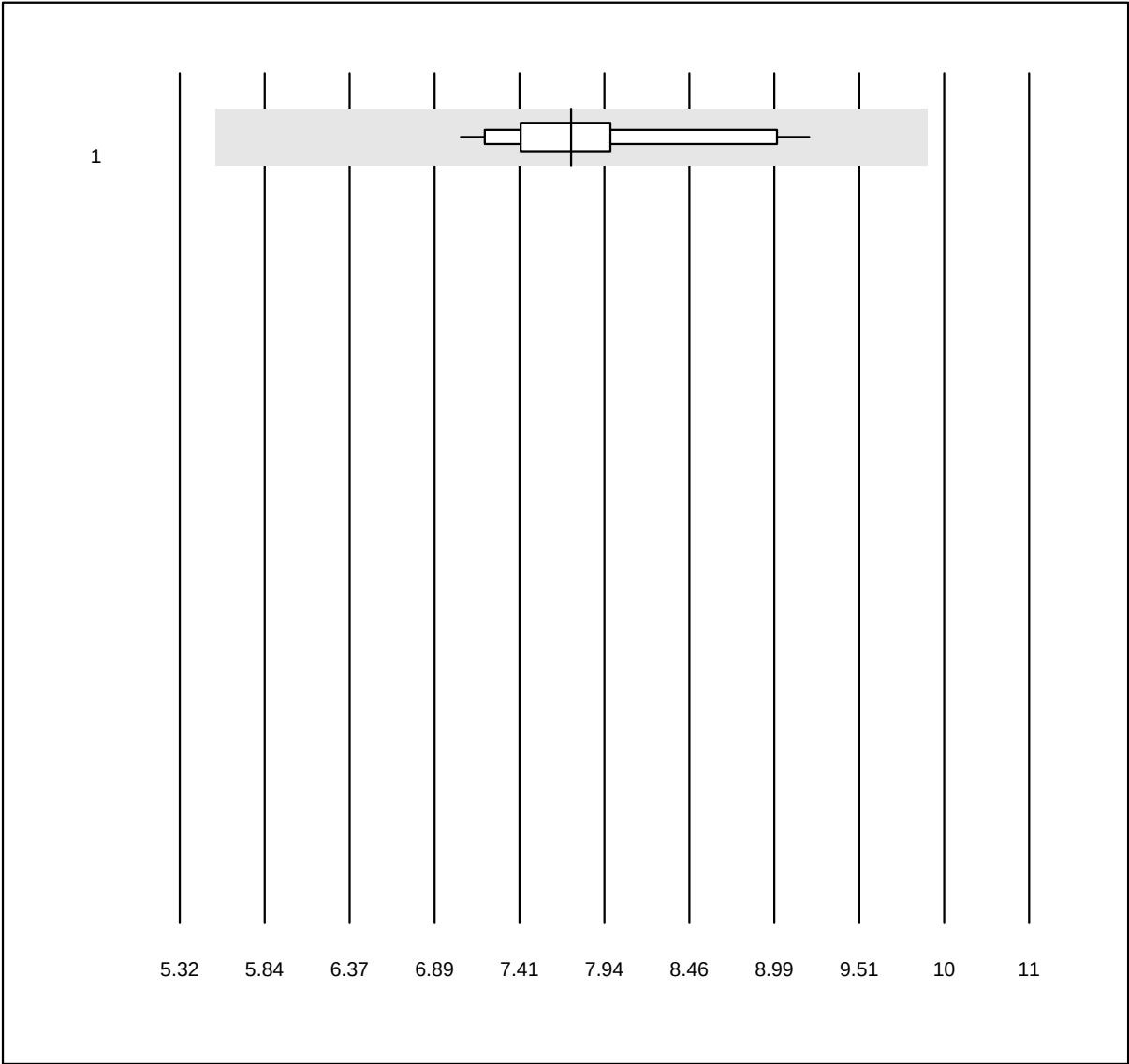


MQ Toleranz: 30%

Beta globulina 1 (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	18	94.4	0.0	5.6	7.9	7.7	e

Beta globulina 2

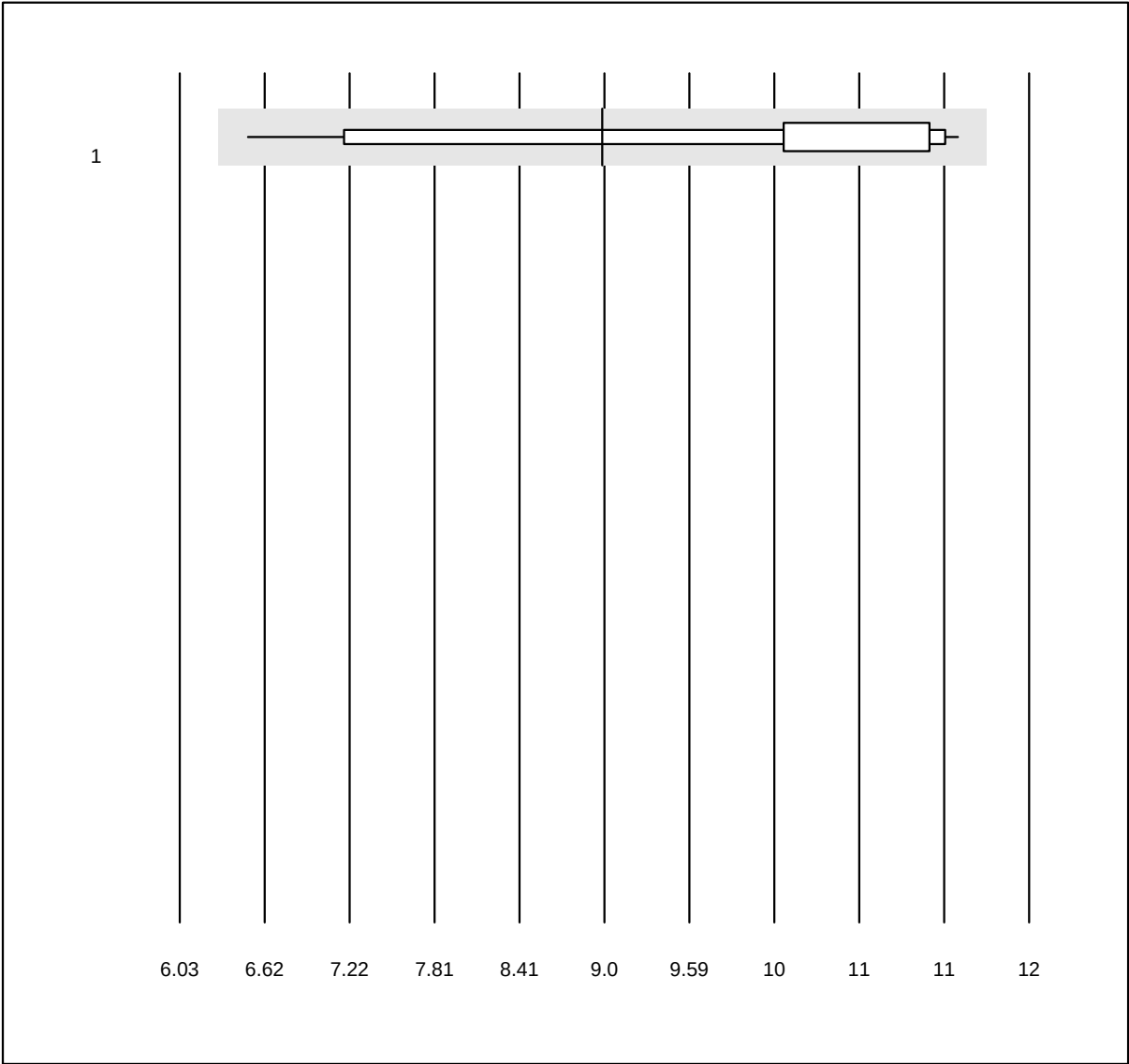


MQ Toleranz: 30%

Beta globulina 2 (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	18	100.0	0.0	0.0	9.0	13.1	a

Beta-Globulina+P

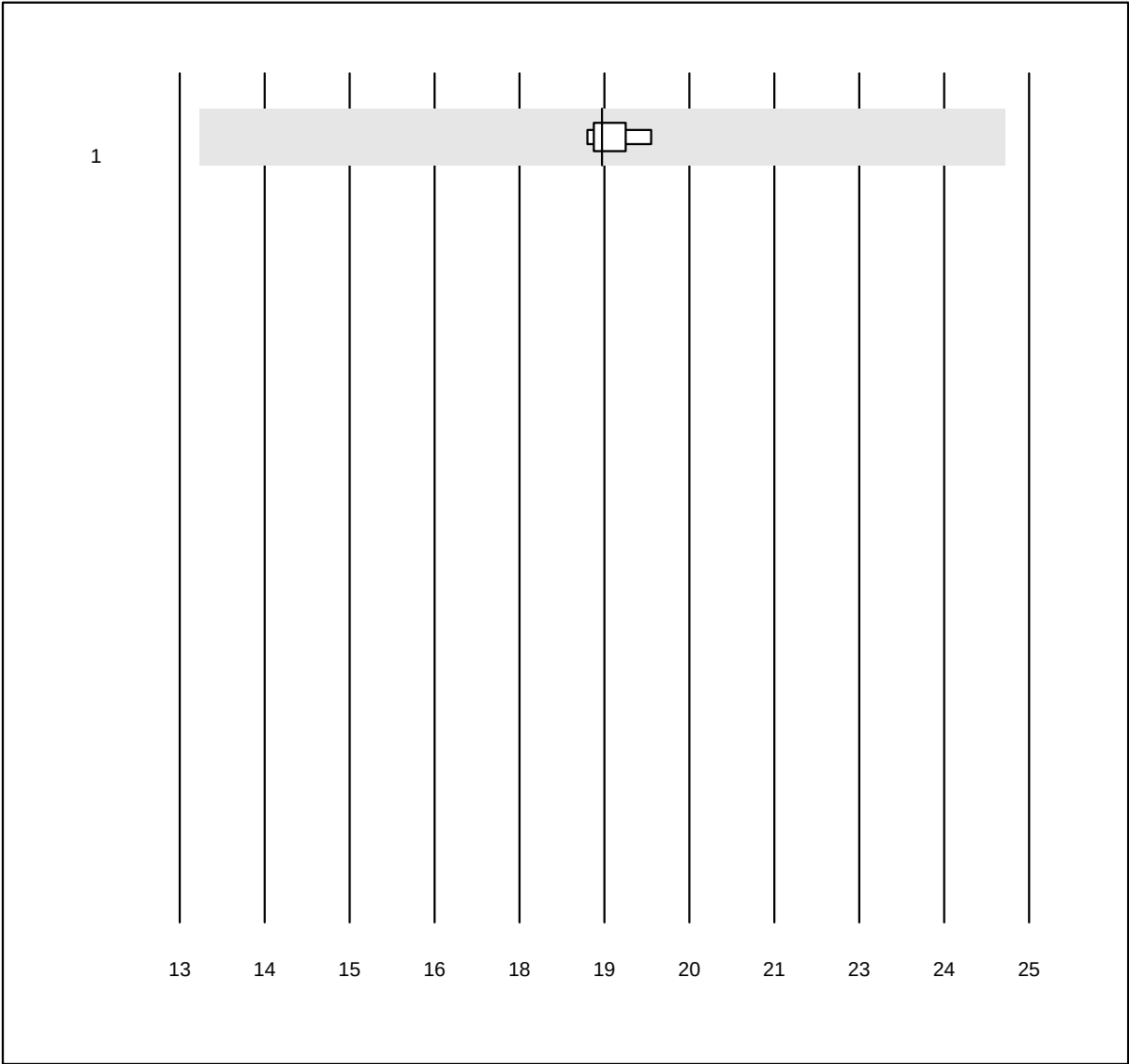


MQ Toleranz: 30%

Beta-Globulina+P (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	5	100.0	0.0	0.0	19	1.5	e

gamma-Globuline

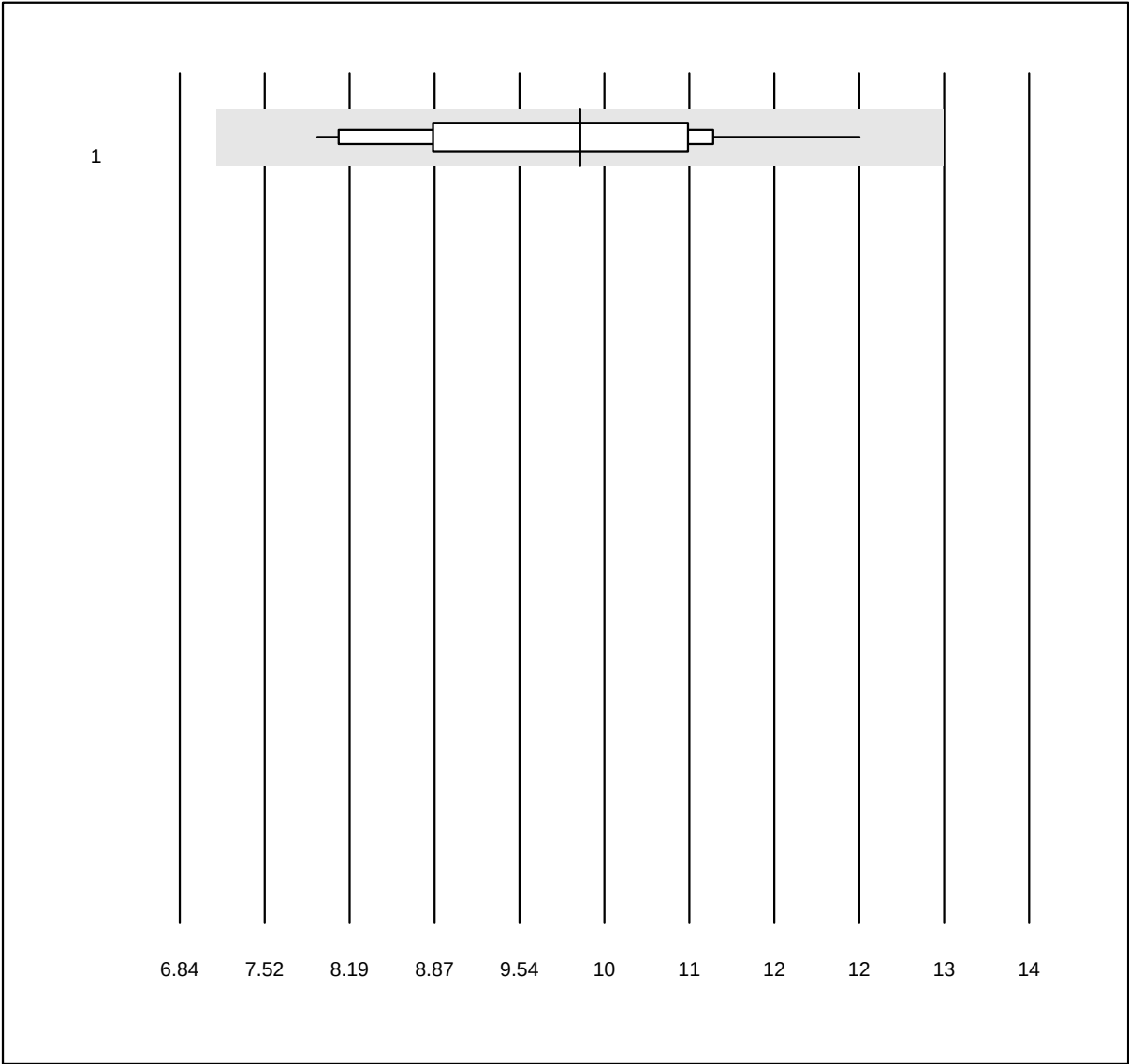


MQ Toleranz: 30%

gamma-Globuline (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	18	100.0	0.0	0.0	10.2	12.4	e

Gamma-Globuline+P

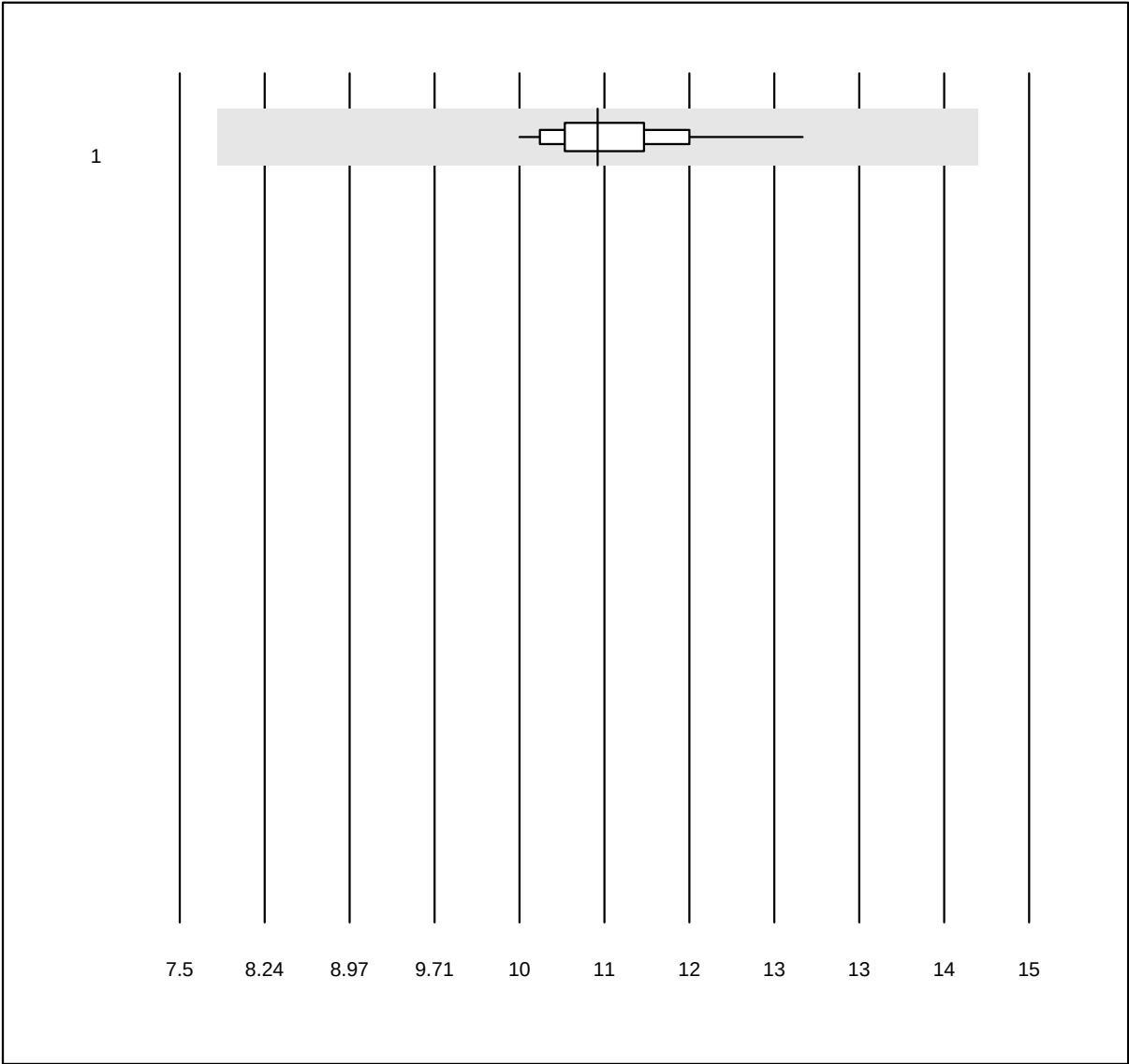


MQ Toleranz: 30%

Gamma-Globuline+P (%)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Elettroforesi	19	100.0	0.0	0.0	11.2	5.0	e

Folati eritrocitari

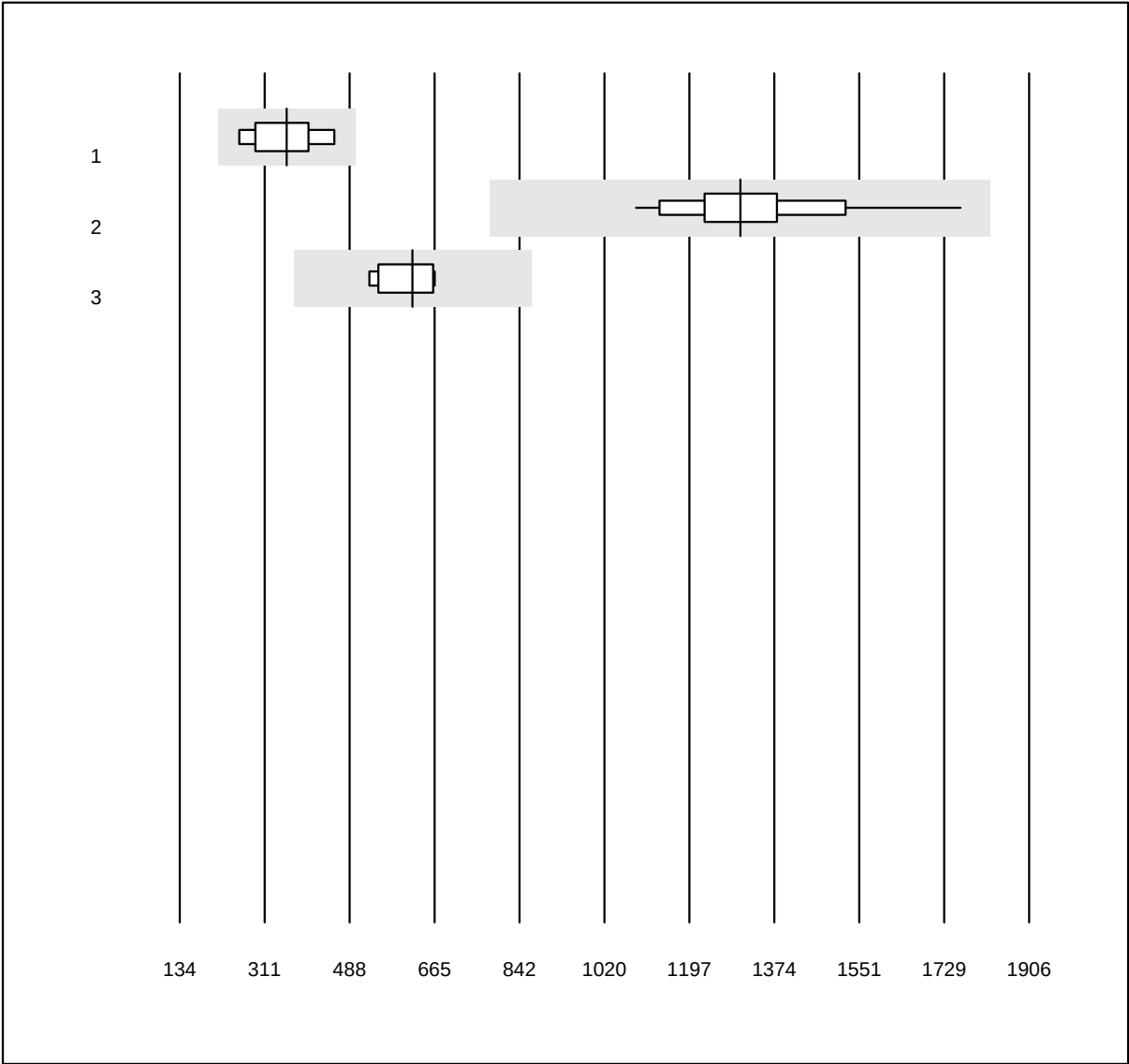


MQ Toleranz: 40%

Folati eritrocitari (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	357	19.4	a*
2 Roche	31	100.0	0.0	0.0	1304	10.9	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	620	9.2	e

3 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Acidi biliari

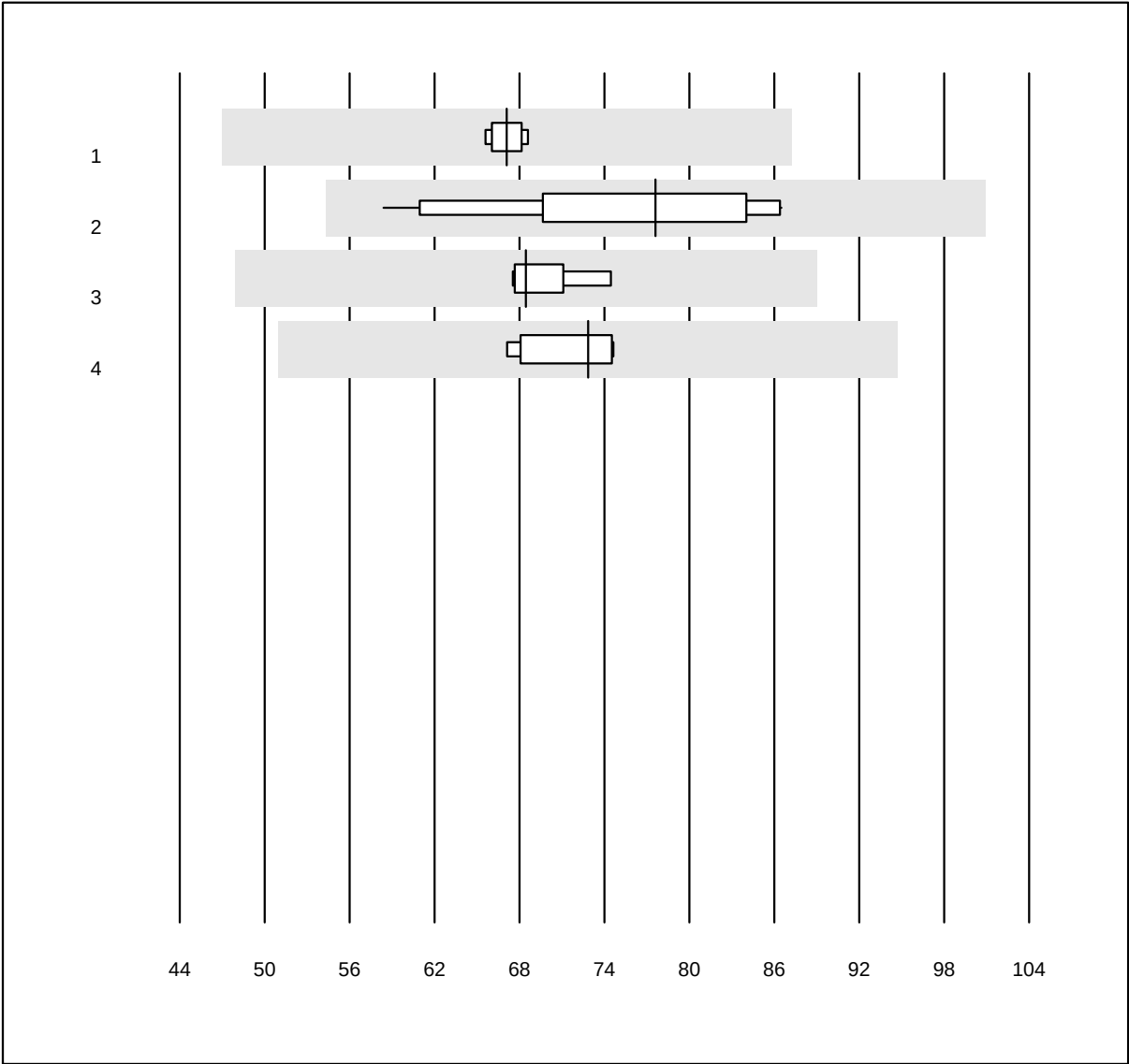


MQ Tolleranz: 30%

Acidi biliari ($\mu\text{mol/l}$)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	4	100.0	0.0	0.0	67.1	1.6	e
2 Roche	14	100.0	0.0	0.0	77.6	11.4	e
3 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	68.5	3.3	e
4 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	72.8	4.5	e

Troponina I Triage

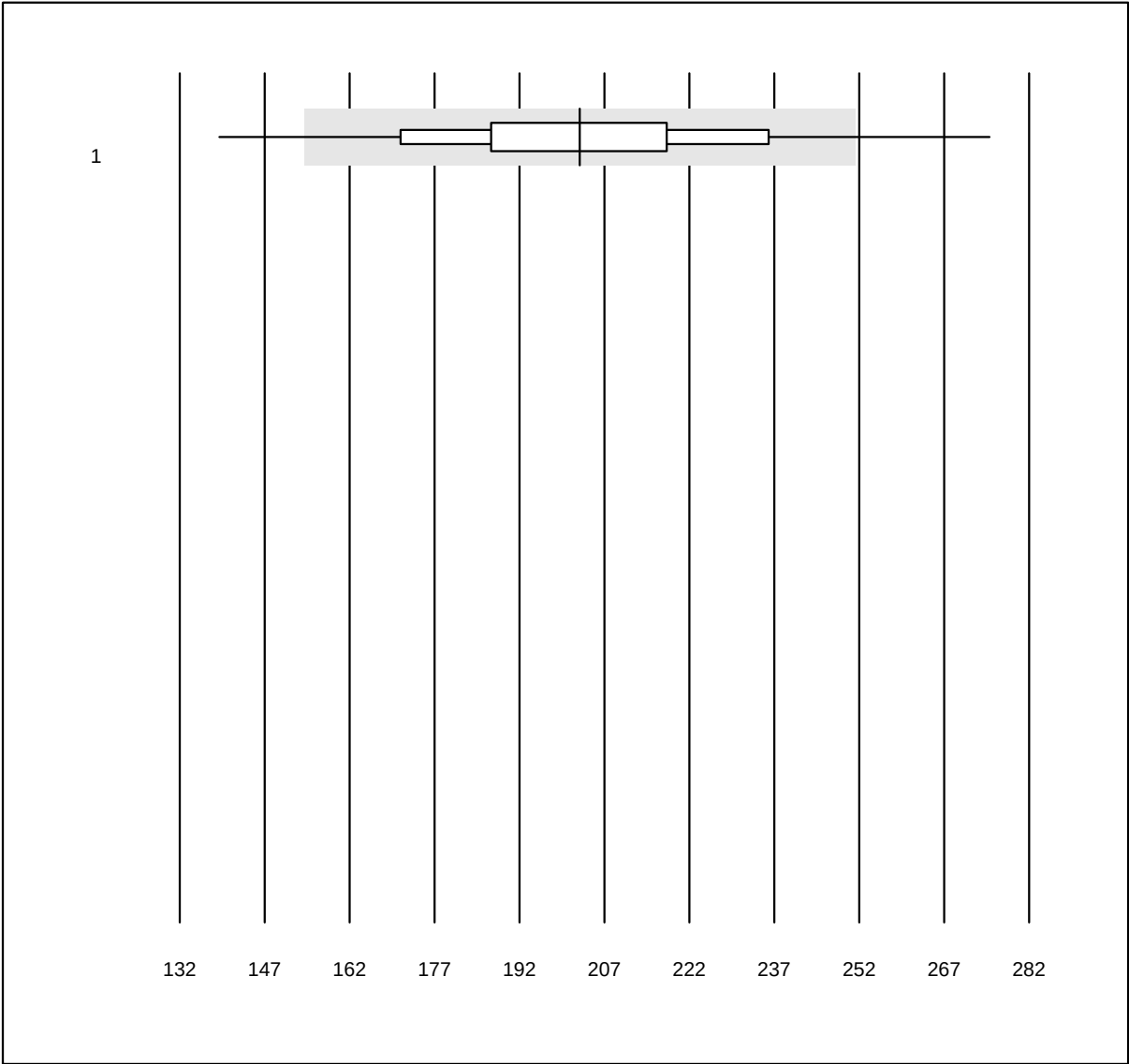


QUALAB Toleranz: 24%

Troponina I Triage (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Triage high sensitive	632	92.1	6.5	1.4	202.64	12.5	e

NT-pro BNP

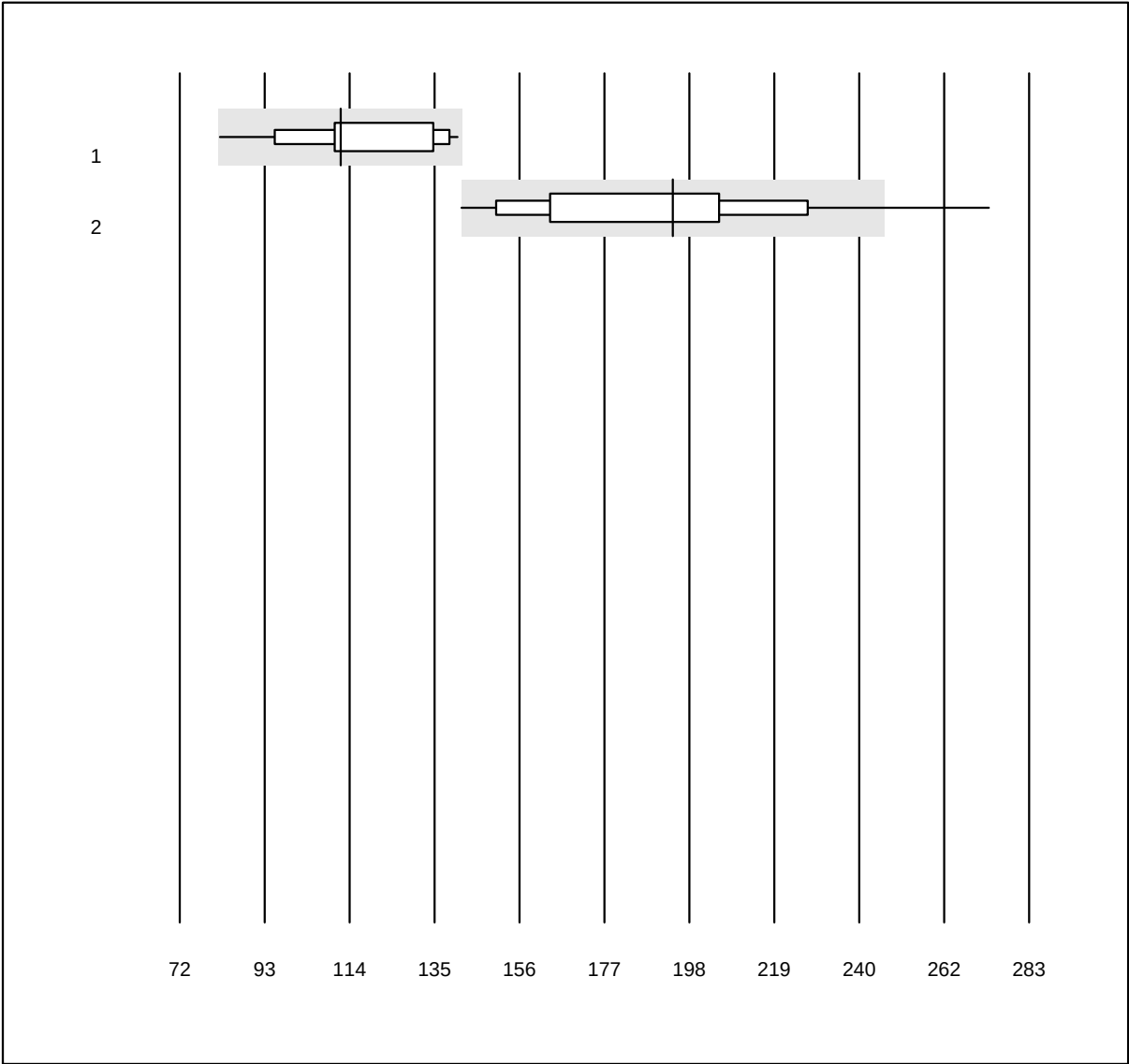


QUALAB Toleranz: 27%

NT-pro BNP (ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Triage (Lot-Gen 1)	73	100.0	0.0	0.0	112	13.2	a
2 Triage	297	91.6	4.4	4.0	195	16.3	a

BNP

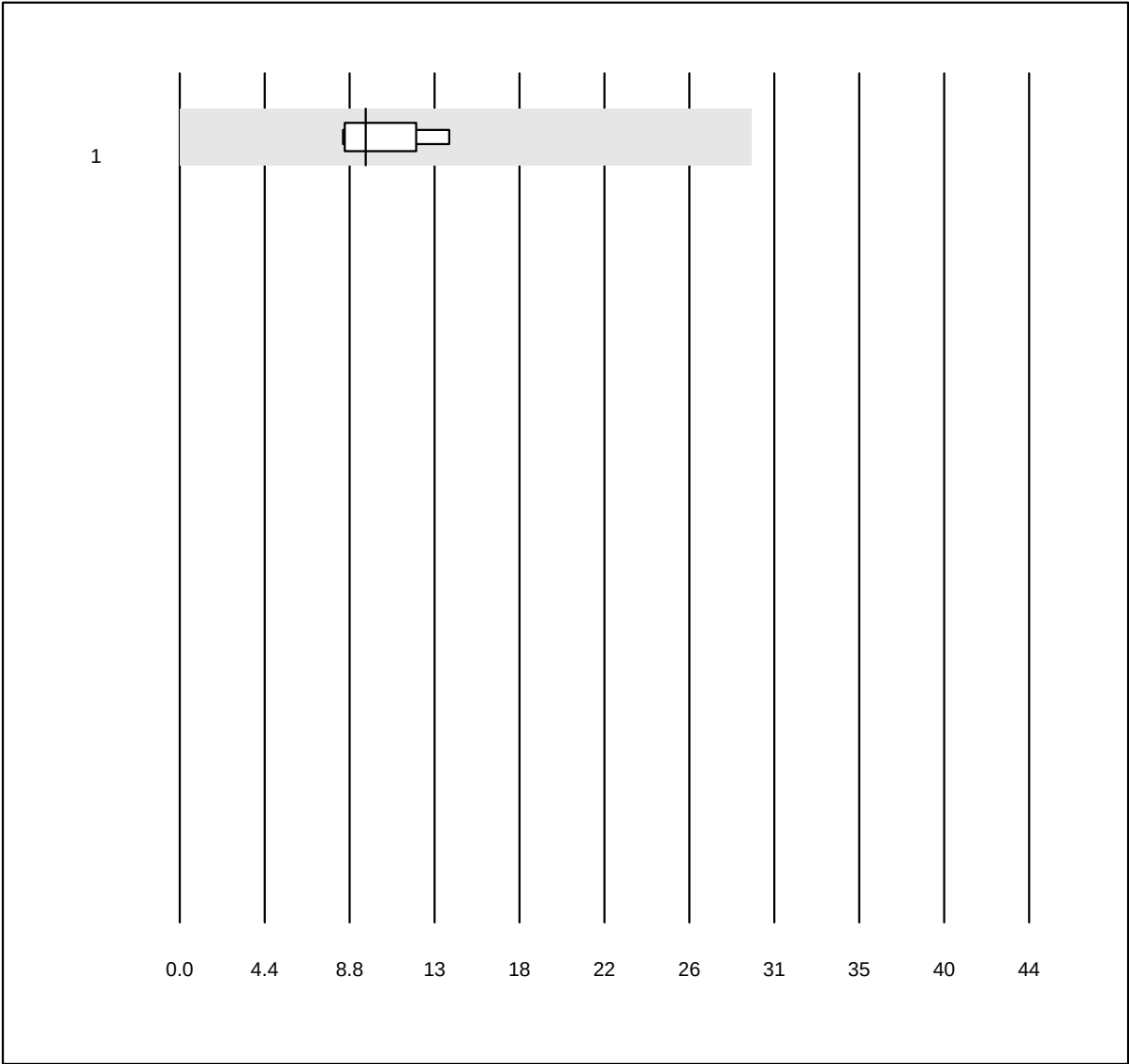


QUALAB Toleranz: 27%
(< 75.0: +/- 20.0 ng/l)

BNP (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Triage	5	100.0	0.0	0.0	9.6	20.4	e

Vitamina D 25 (OH)

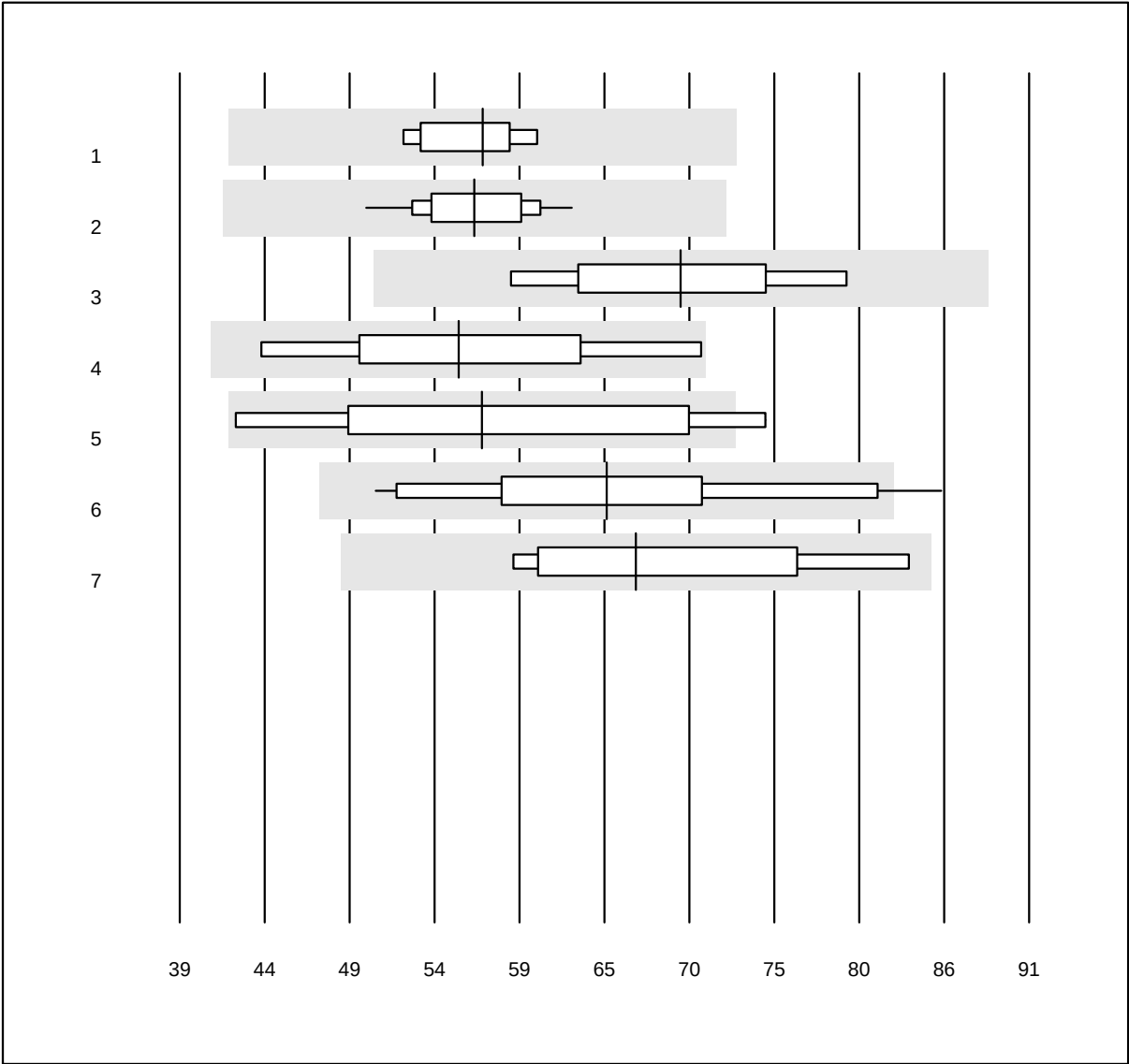


QUALAB Toleranz: 27%

Vitamina D 25 (OH) (nmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	6	100.0	0.0	0.0	57.5	5.0	e
2 Roche	27	100.0	0.0	0.0	57.0	5.6	e
3 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	69.7	9.3	e*
4 VIDAS	4	100.0	0.0	0.0	56.1	13.0	e*
5 AFIAS	10	80.0	10.0	10.0	57.5	19.4	a*
6 RapidReader Cube Reader	13	92.3	7.7	0.0	65.1	14.2	e*
7 altri metodi	5	100.0	0.0	0.0	66.9	12.4	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Vitamina D 1,25-(OH)2

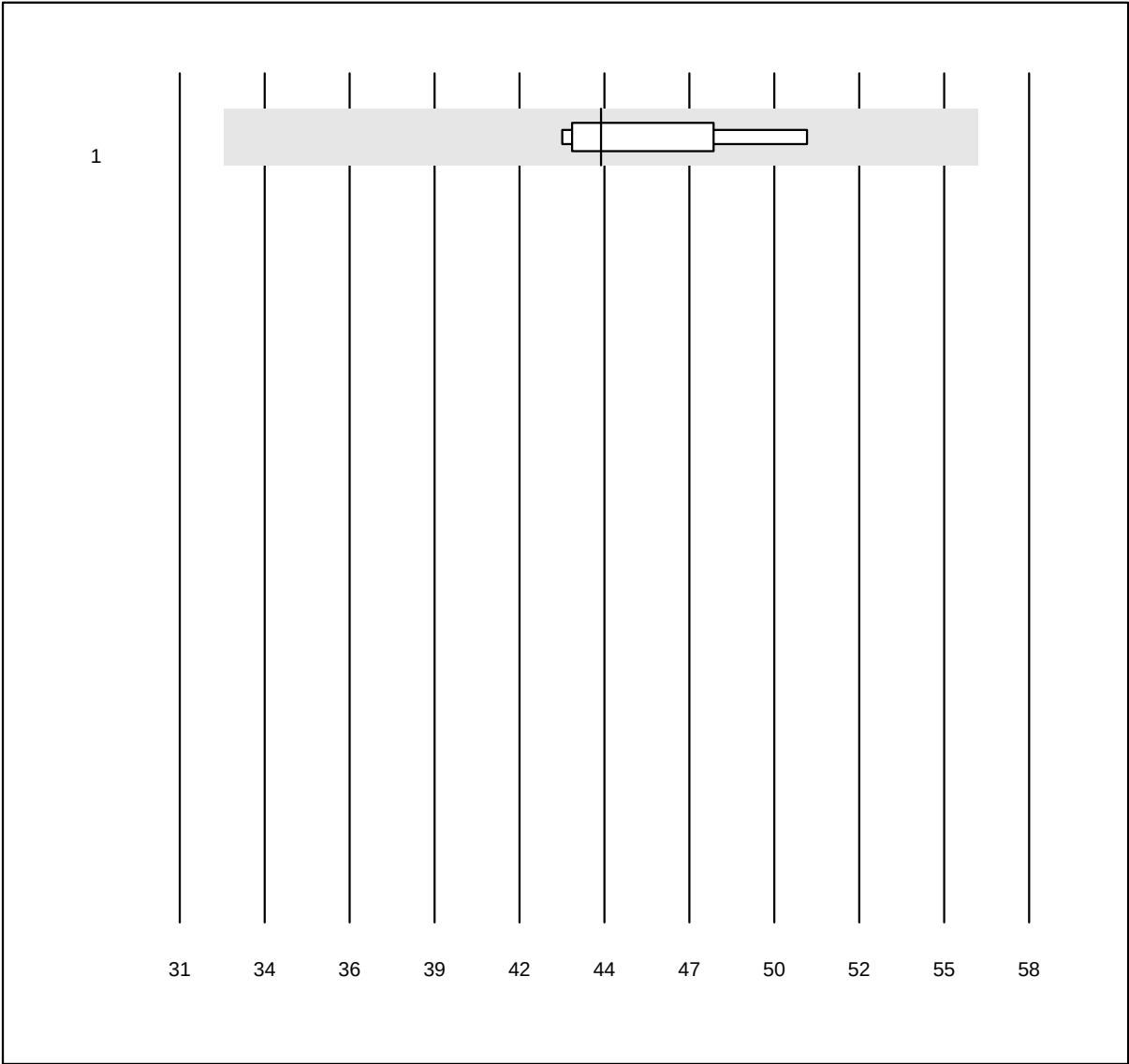


MQ Toleranz: 27%

Vitamina D 1,25-(OH)2
(ng/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	44.4	5.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

AMH

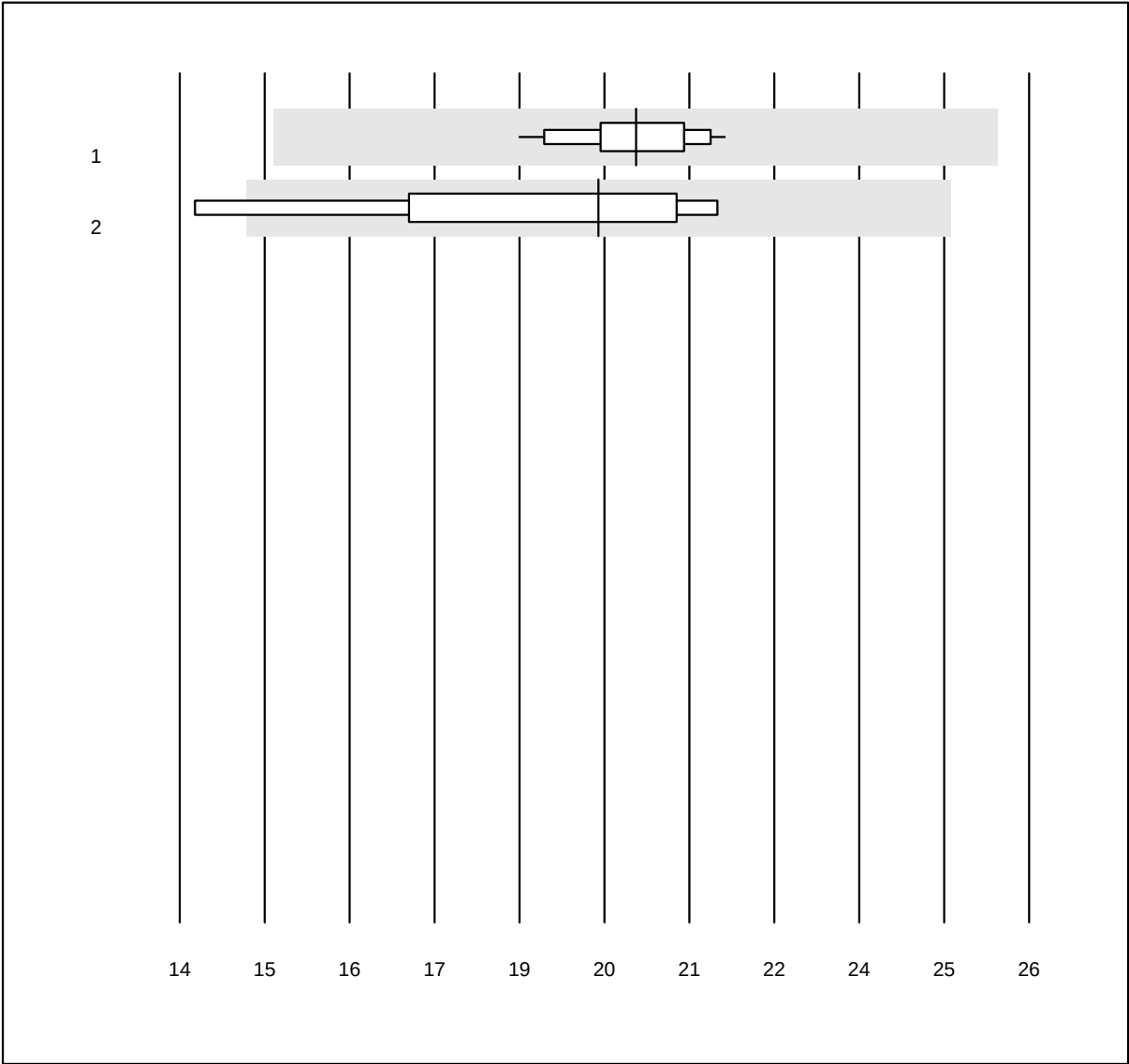


MQ Toleranz: 25%

AMH (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	14	100.0	0.0	0.0	20.4	3.9	e
2 VIDAS	5	100.0	0.0	0.0	19.9	11.7	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Inibina B

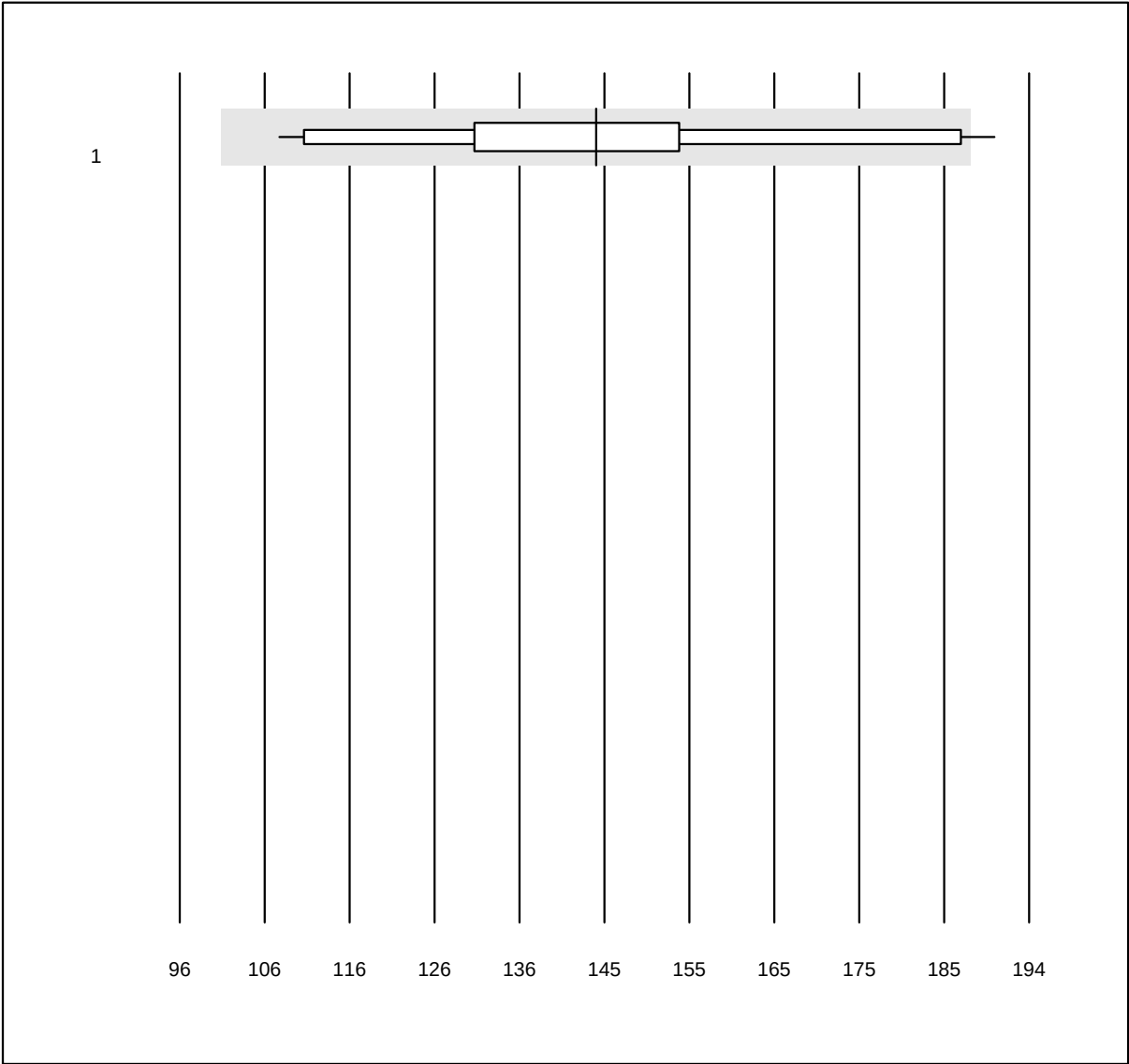


MQ Toleranz: 30%

Inibina B (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	11	90.9	9.1	0.0	144.0	15.8	e*

Calcitonina

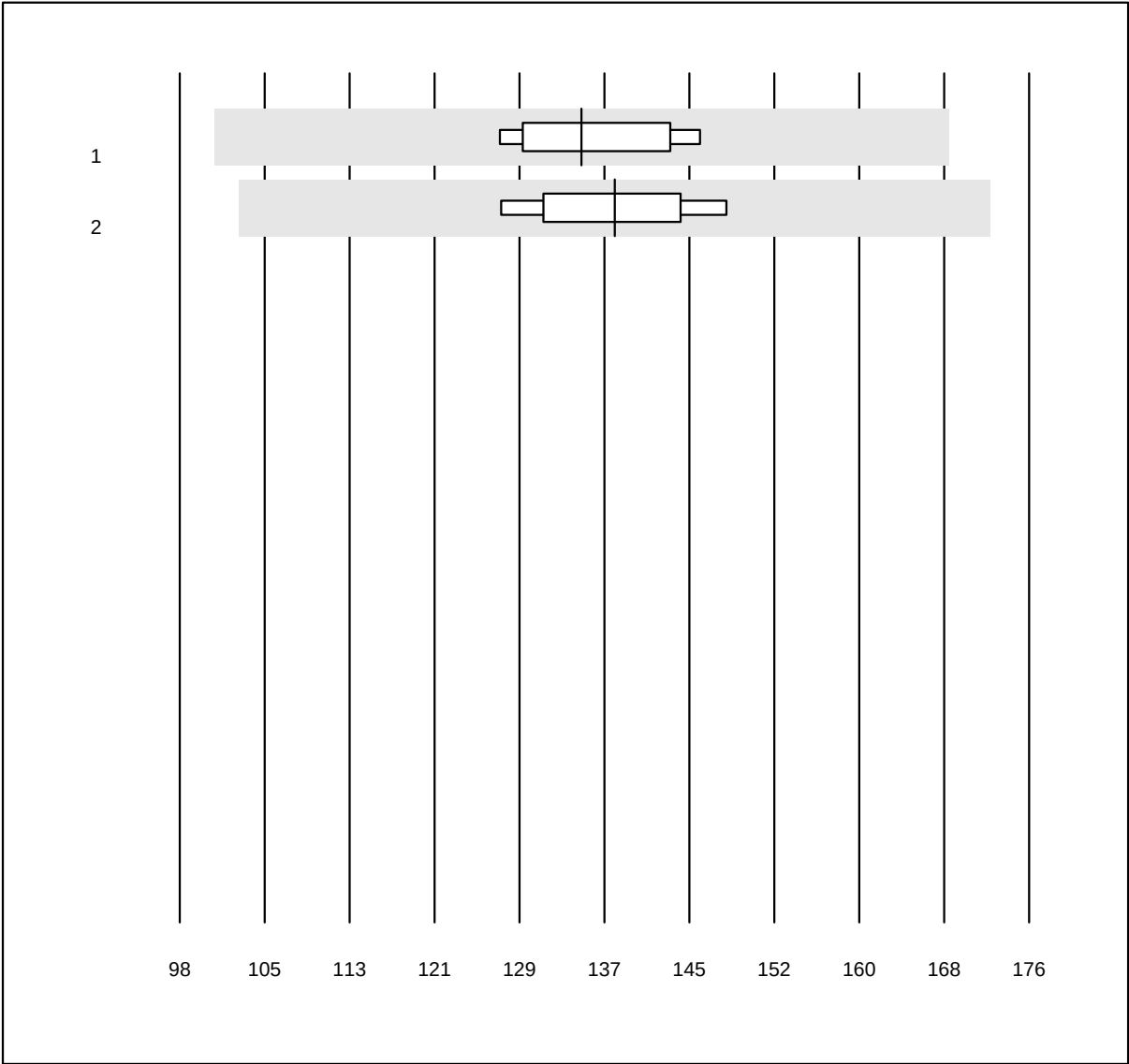


MQ Toleranz: 25%

Calcitonina (pmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Liaison	6	100.0	0.0	0.0	134.9	5.3	e
2 altri metodi	6	100.0	0.0	0.0	137.9	4.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Aldosterone

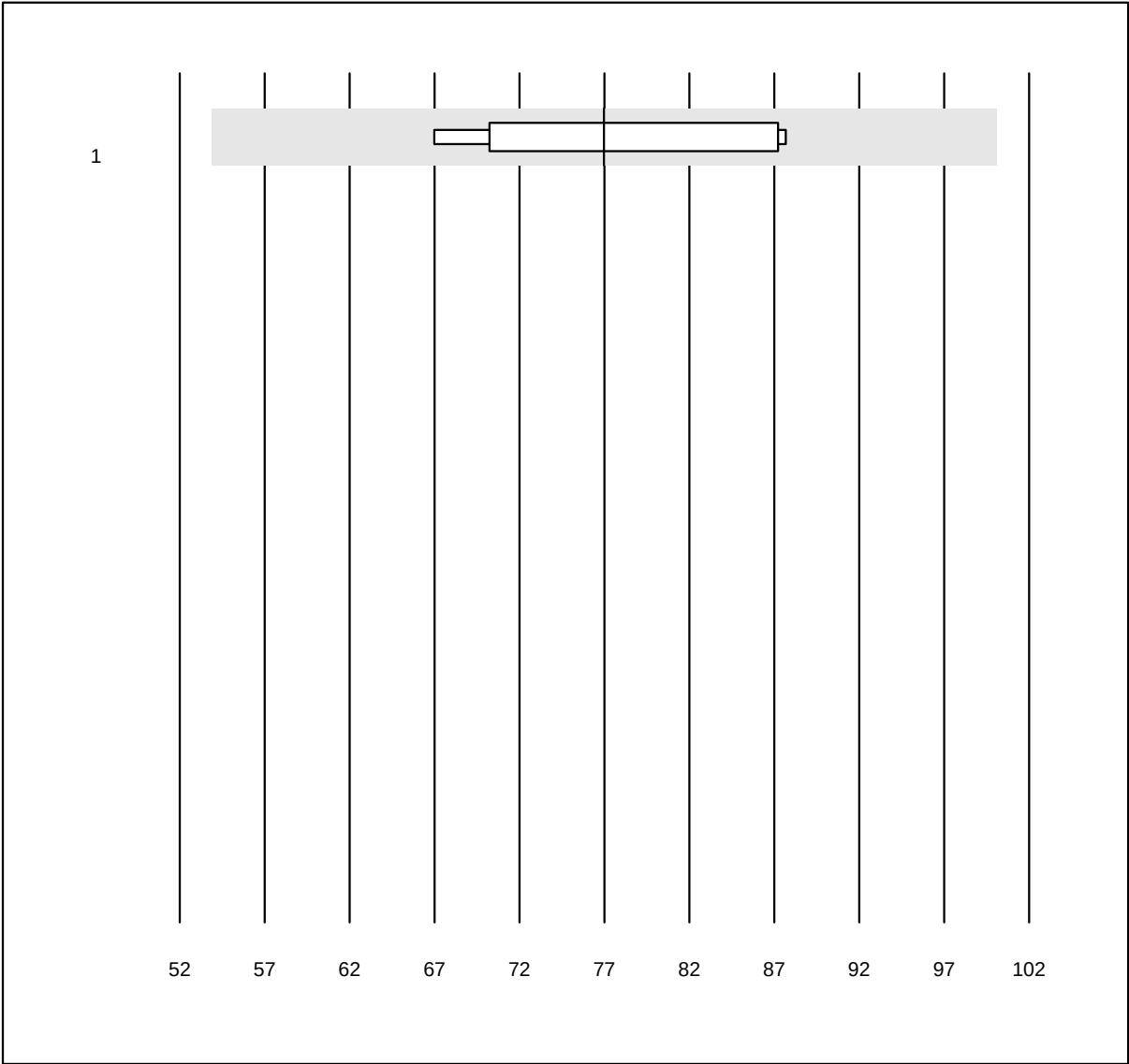


MQ Toleranz: 30%

Aldosterone (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Liaison	7	100.0	0.0	0.0	77.0	9.8	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IGF-BP3

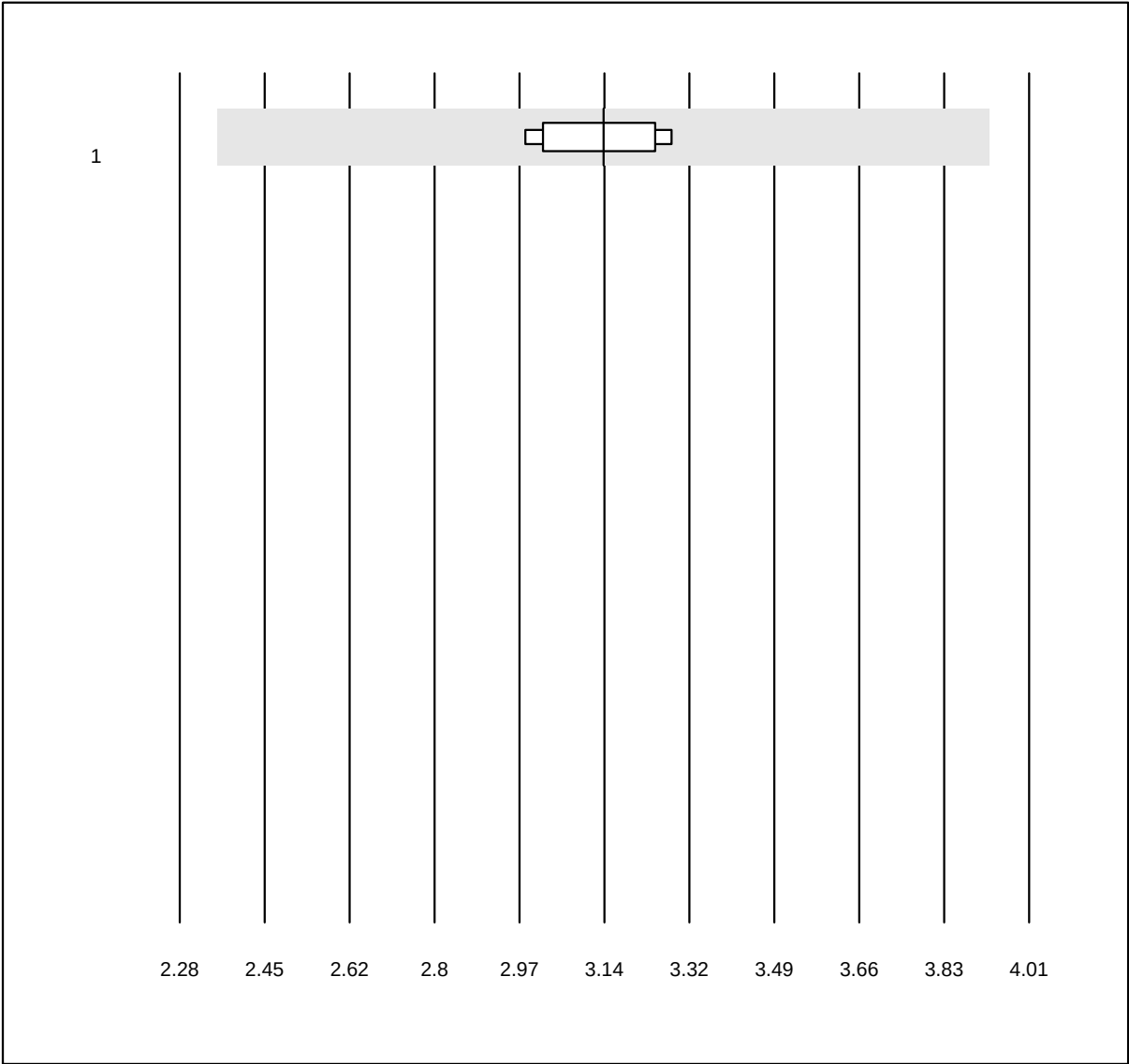


MQ Toleranz: 25%

IGF-BP3 (mg/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Cobas	5	100.0	0.0	0.0	3.14	3.7	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Renina

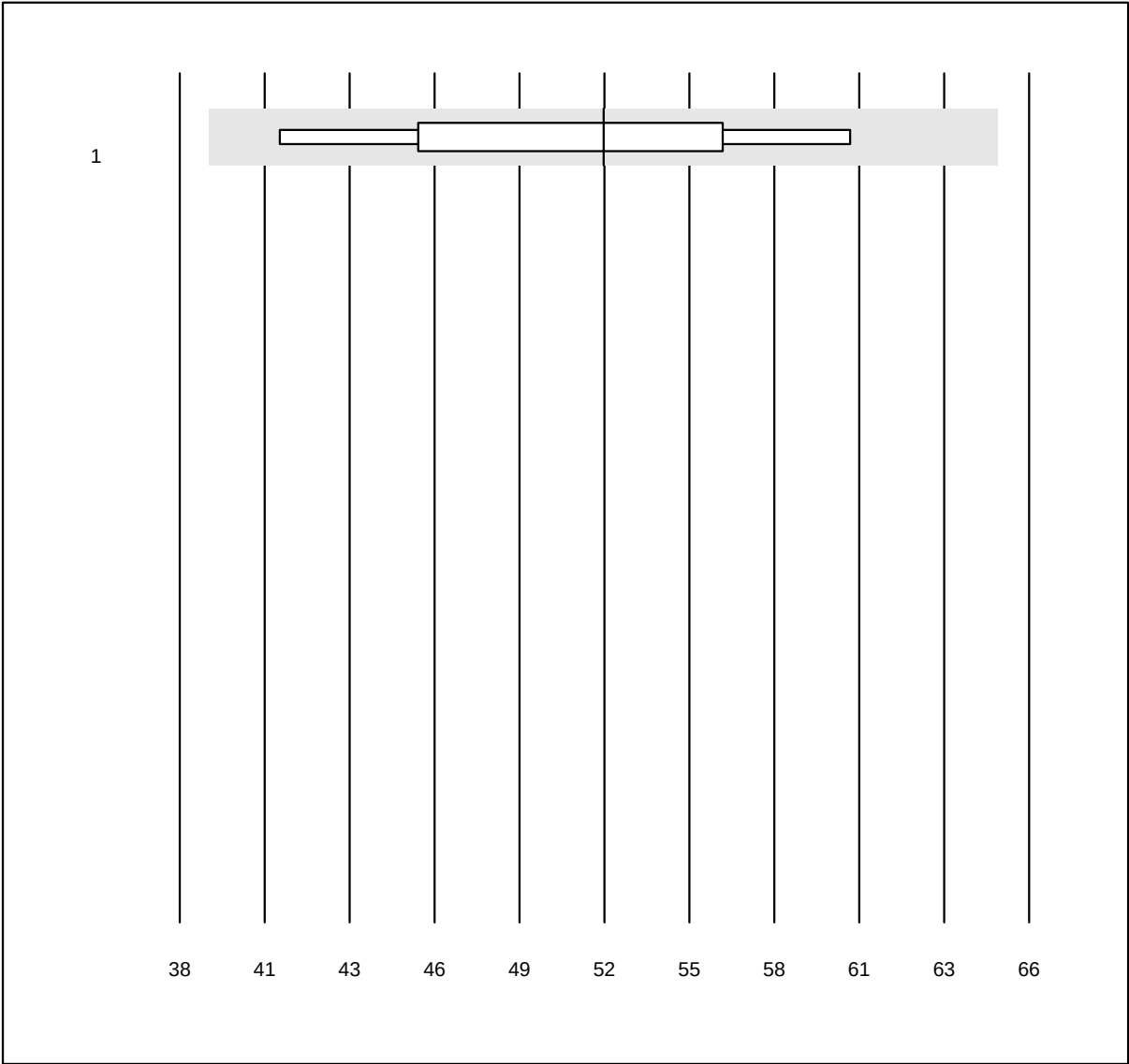


MQ Toleranz: 25%

Renina (mU/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Liaison	9	100.0	0.0	0.0	52.0	11.6	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Anti Tireoglobulina

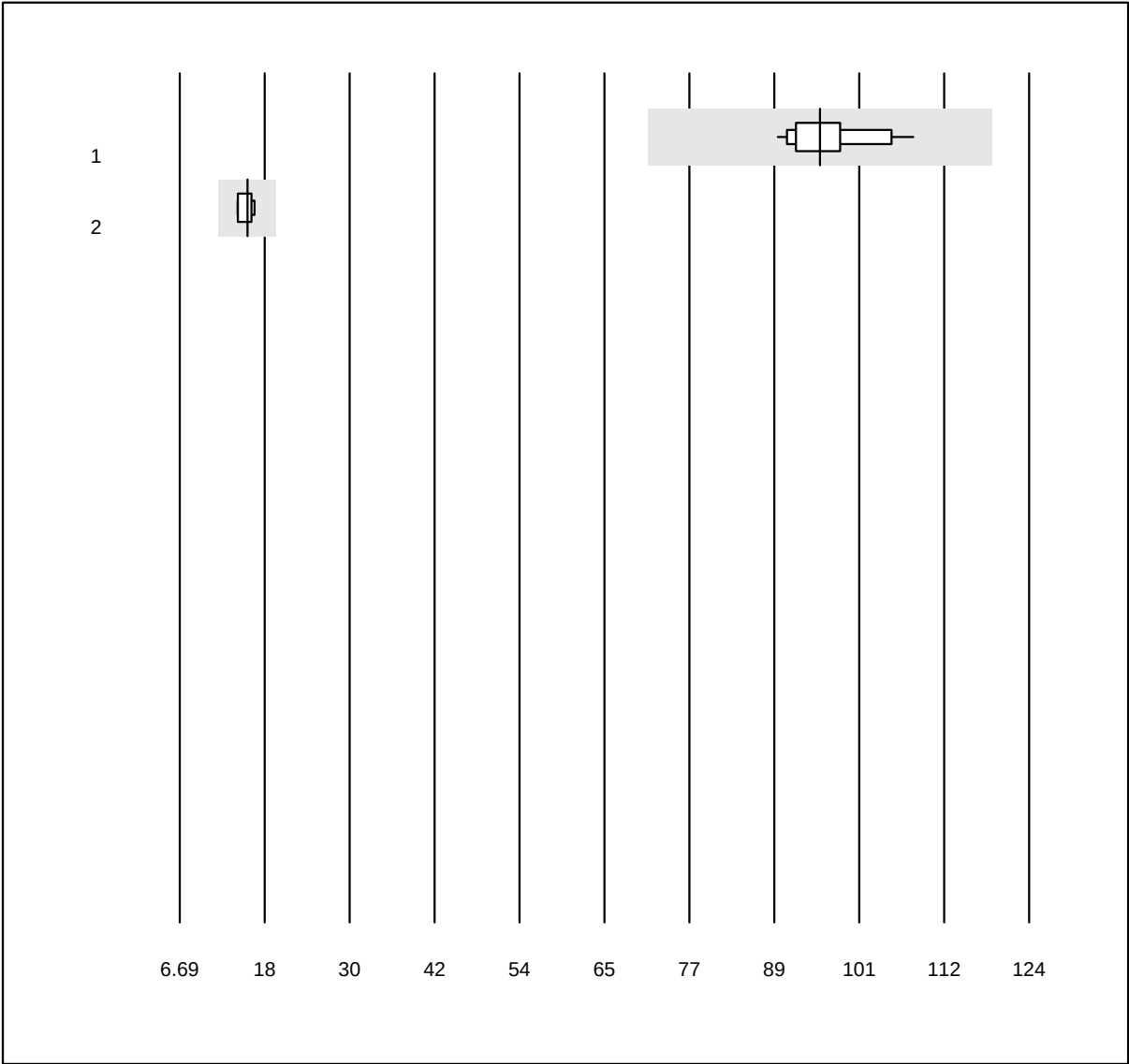


MQ Toleranz: 25%

Anti Tiroglobulina (IU/ml)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Roche	15	100.0	0.0	0.0	95.1	5.2	e
2 Alinity	6	100.0	0.0	0.0	16.1	5.8	e

5 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Anti TPO

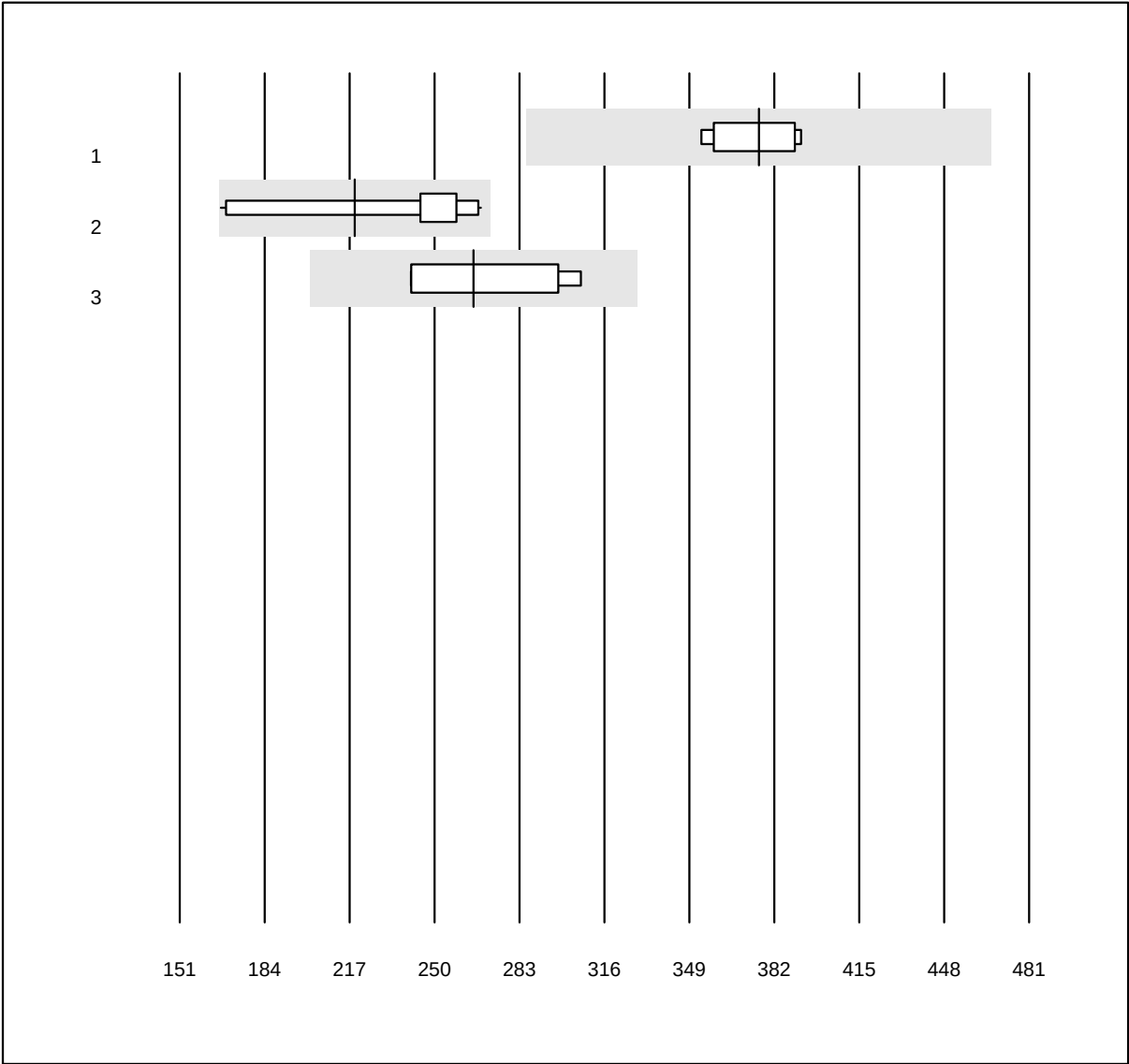


QUALAB Toleranz: 24%

Anti TPO (IU/ml)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	7	100.0	0.0	0.0	376.0	4.4	e
2 Roche	14	100.0	0.0	0.0	219.0	13.2	a*
3 Phadia	4	100.0	0.0	0.0	265.1	11.8	e*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

TRAK

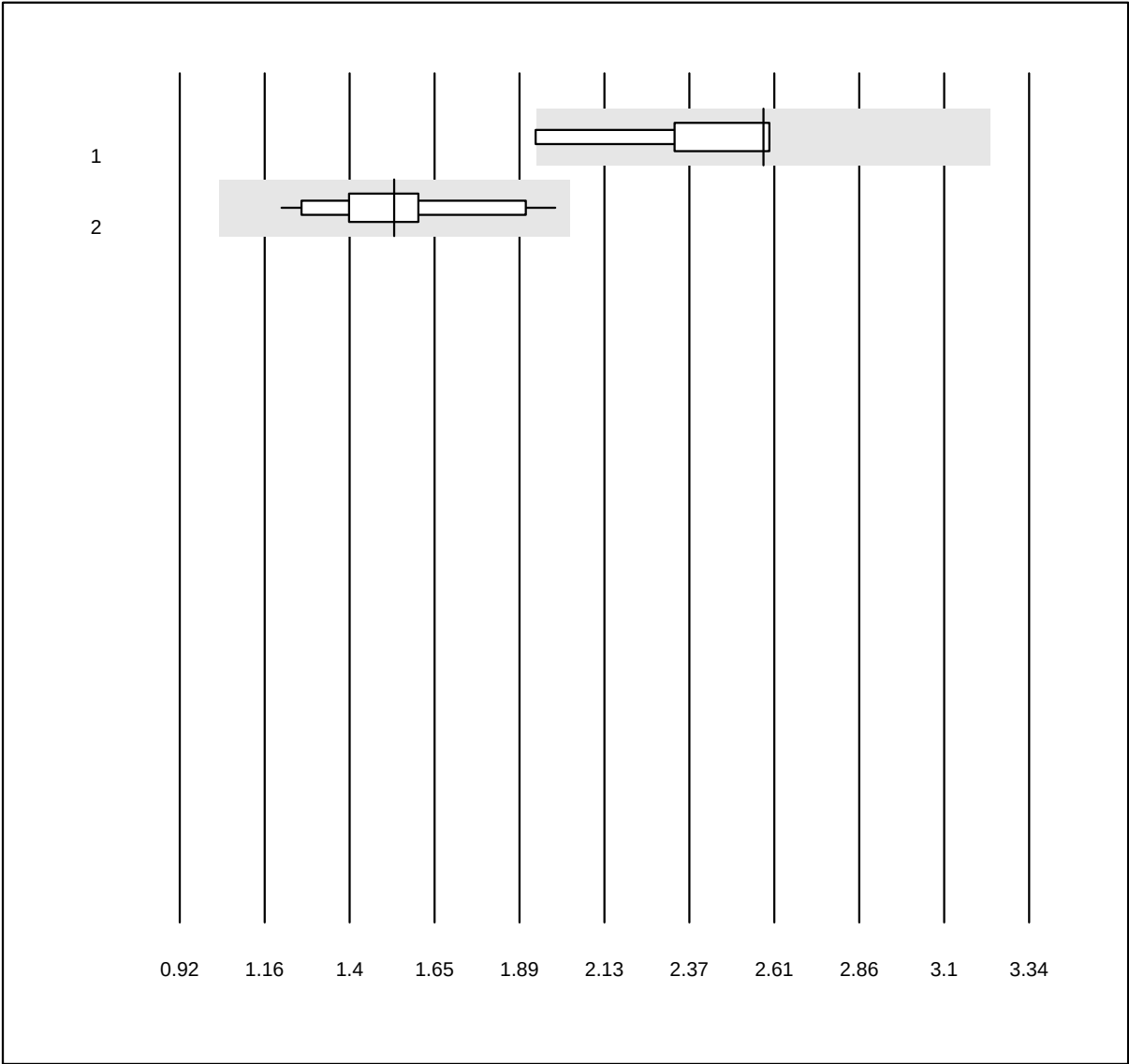


MQ Toleranz: 25%

TRAK (IU/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.58	8.6	e*
2 Roche	12	100.0	0.0	0.0	1.53	12.6	e

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatinina WB

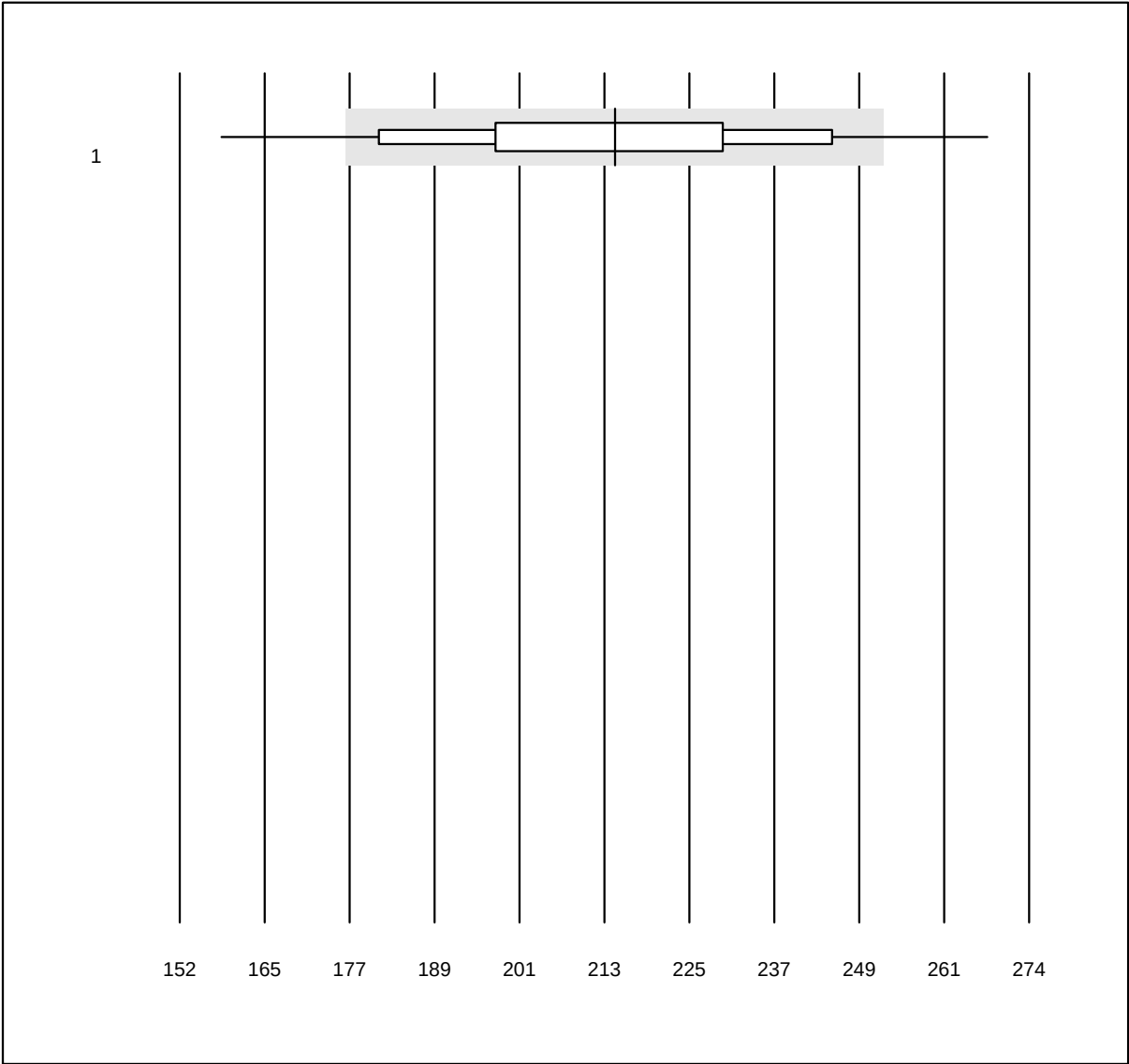


QUALAB Toleranz: 18%

Creatinina WB (µmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Statsensor i / Nova	94	89.4	8.5	2.1	215	10.8	e

eGFR CDK-EPI WB

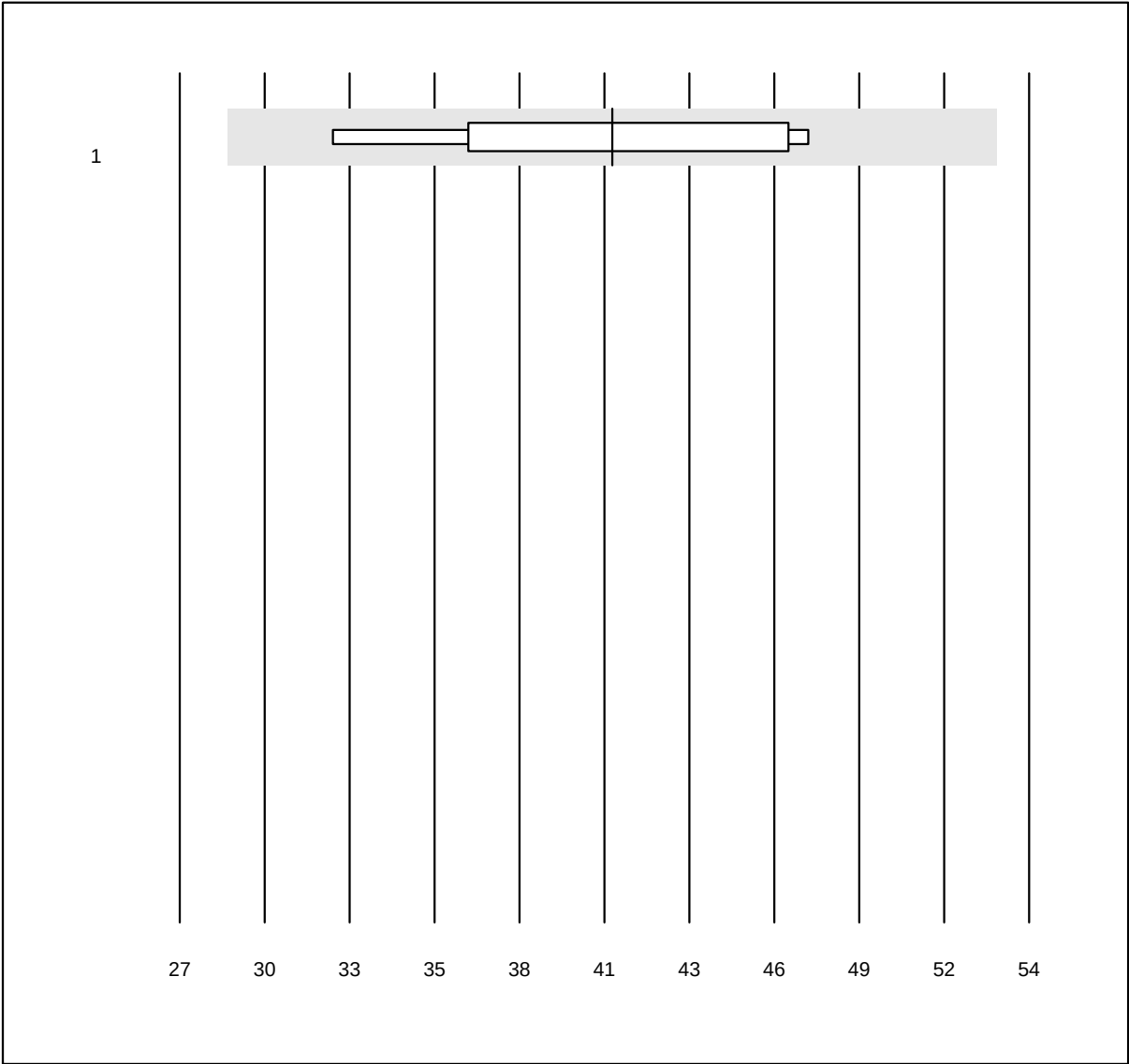


MQ Toleranz: 30%

eGFR CDK-EPI WB ()

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Statsensor i / Nova	6	100.0	0.0	0.0	41	13.7	e*

Keton WB

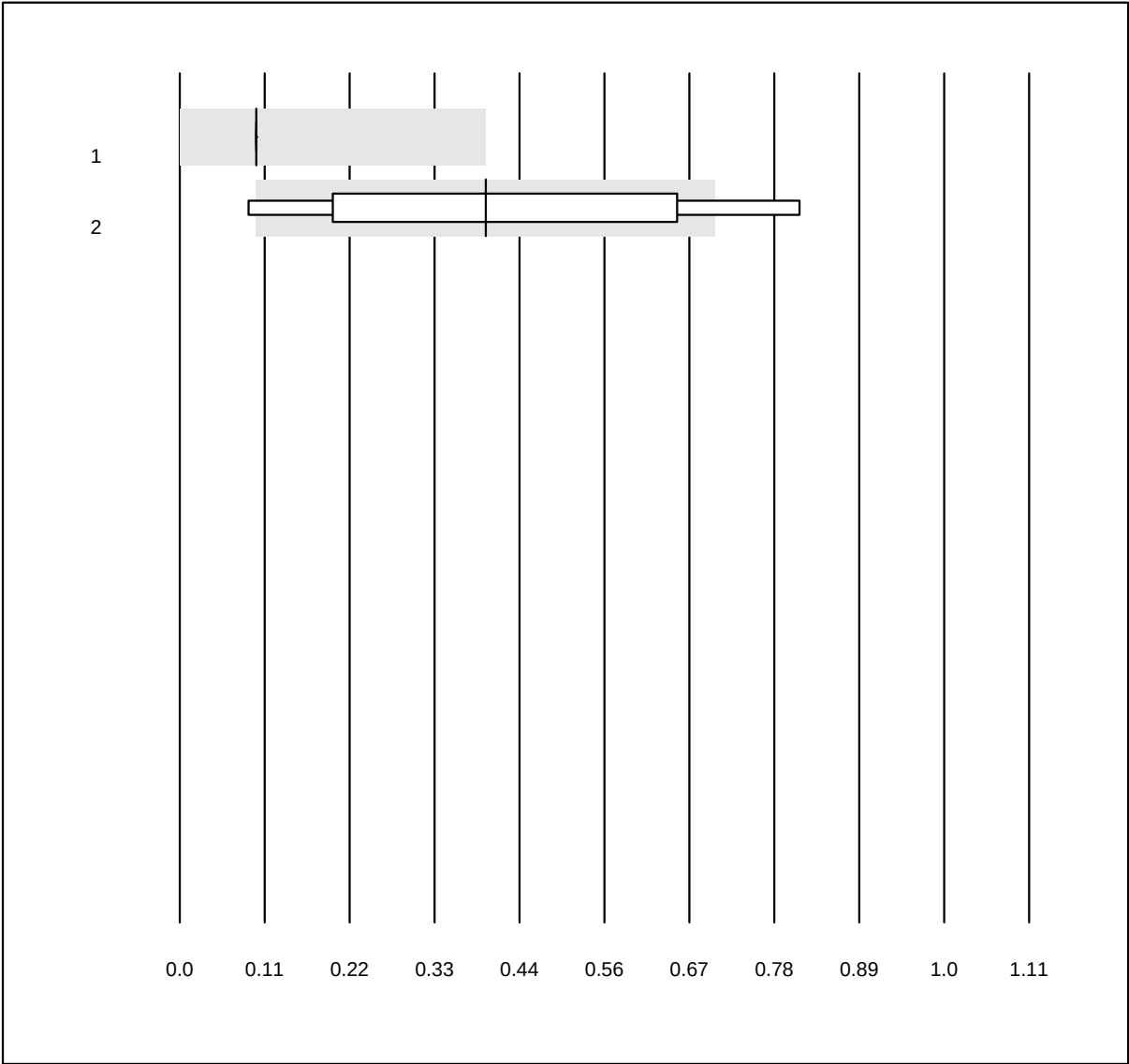


MQ Toleranz: 40%
(< 1.0: +/- 0.3 mmol/l)

Keton WB (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 altri metodi	9	100.0	0.0	0.0	0.100	0.0	a
2 Ketosure APEXBIO	8	75.0	25.0	0.0	0.400	62.7	a*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

IL6

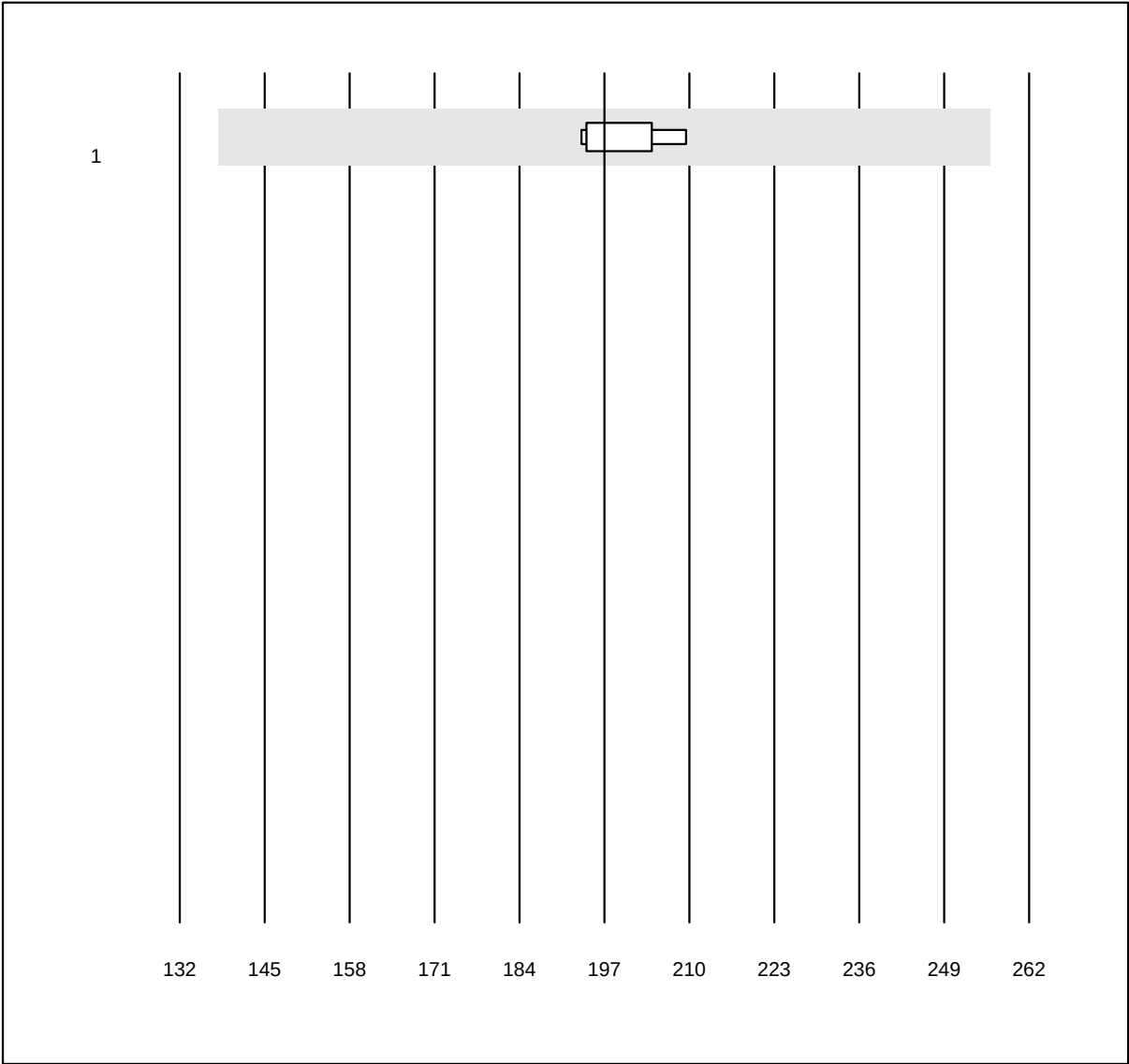


MQ Toleranz: 30%

IL6 (ng/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	197.0	2.7	e

Elastasi pancreatica

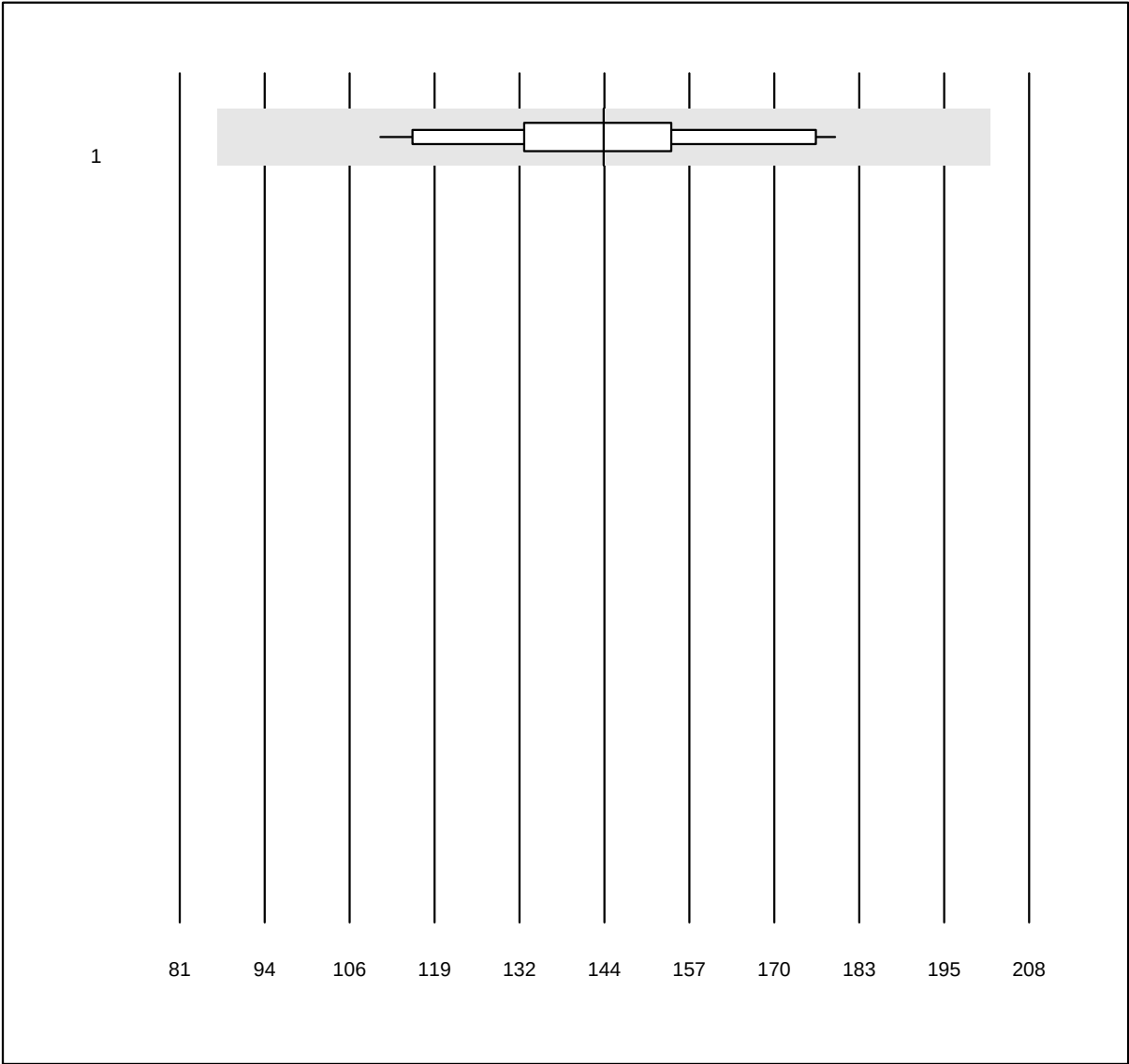


MQ Toleranz: 40%

Elastasi pancreatica (µg/g)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	altri metodi	18	94.4	0.0	5.6	144	13.0	e

Copeptina

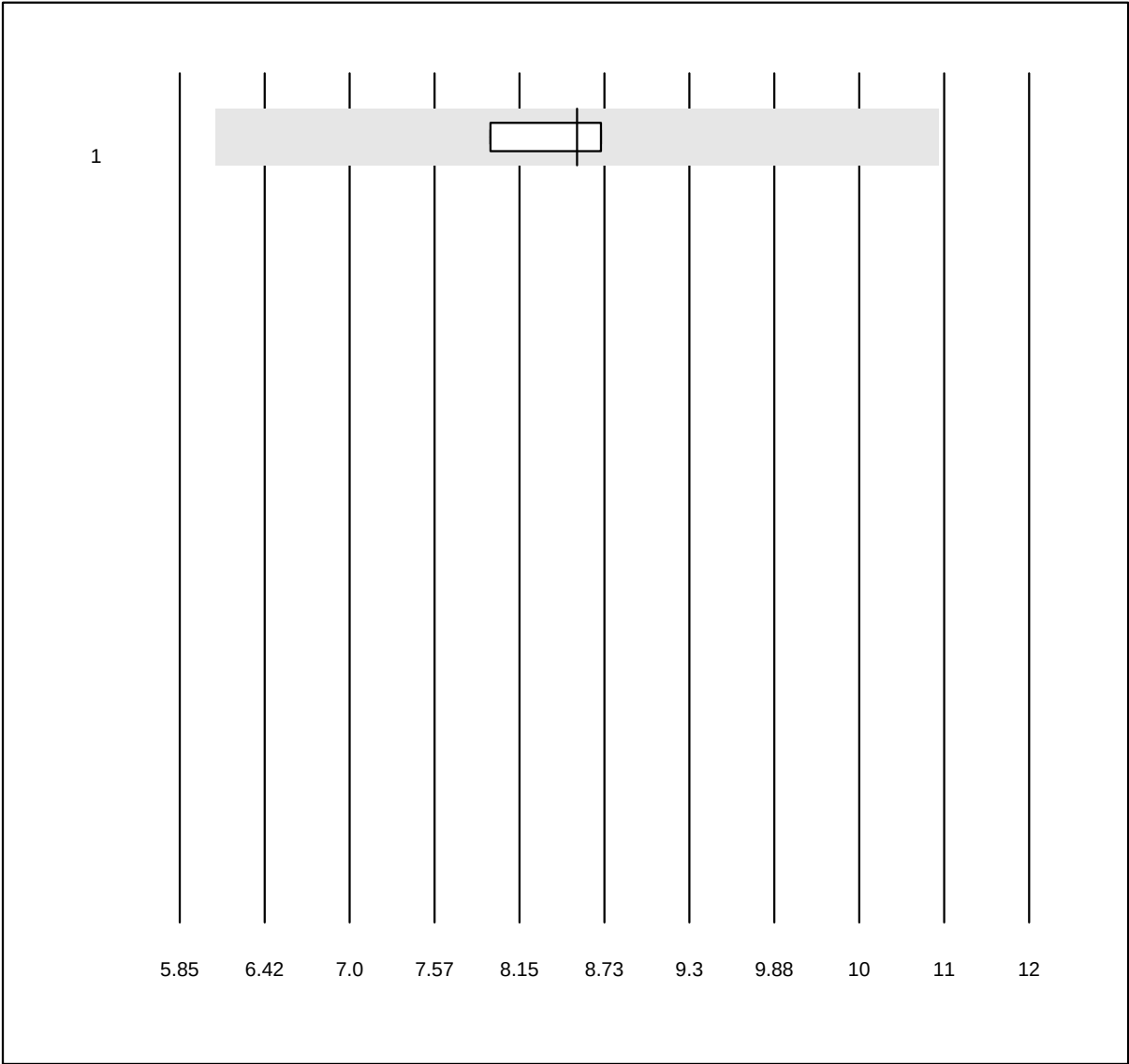


MQ Toleranz: 30%

Copeptina (pmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Kryptor	7	100.0	0.0	0.0	8.7	4.1	e

PIGF

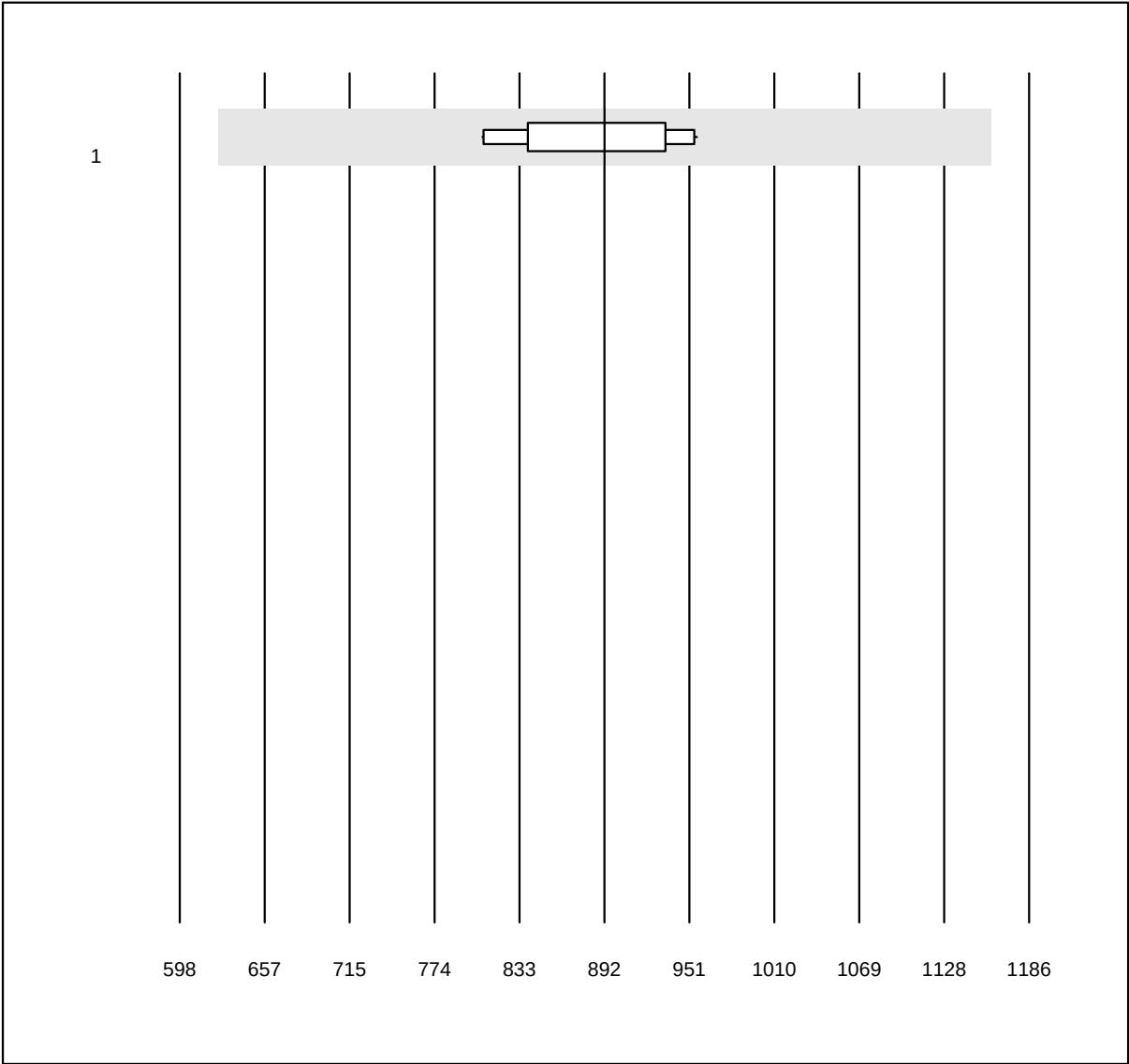


MQ Toleranz: 30%

PIGF (pg/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	10	100.0	0.0	0.0	892.1	6.1	e

SFIT1

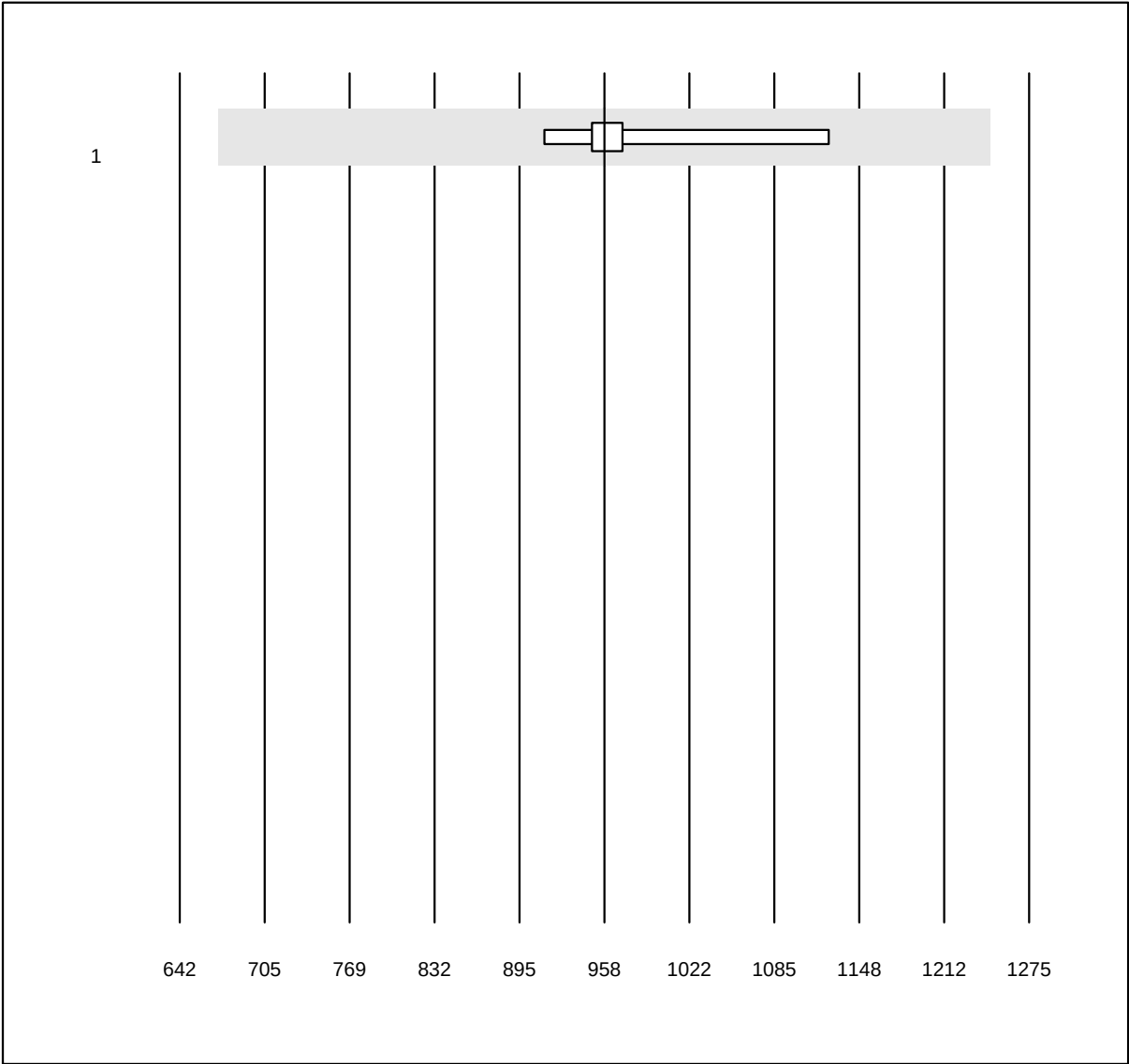


MQ Toleranz: 30%

SFIT1 (pg/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	8	100.0	0.0	0.0	958.5	6.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

tHb

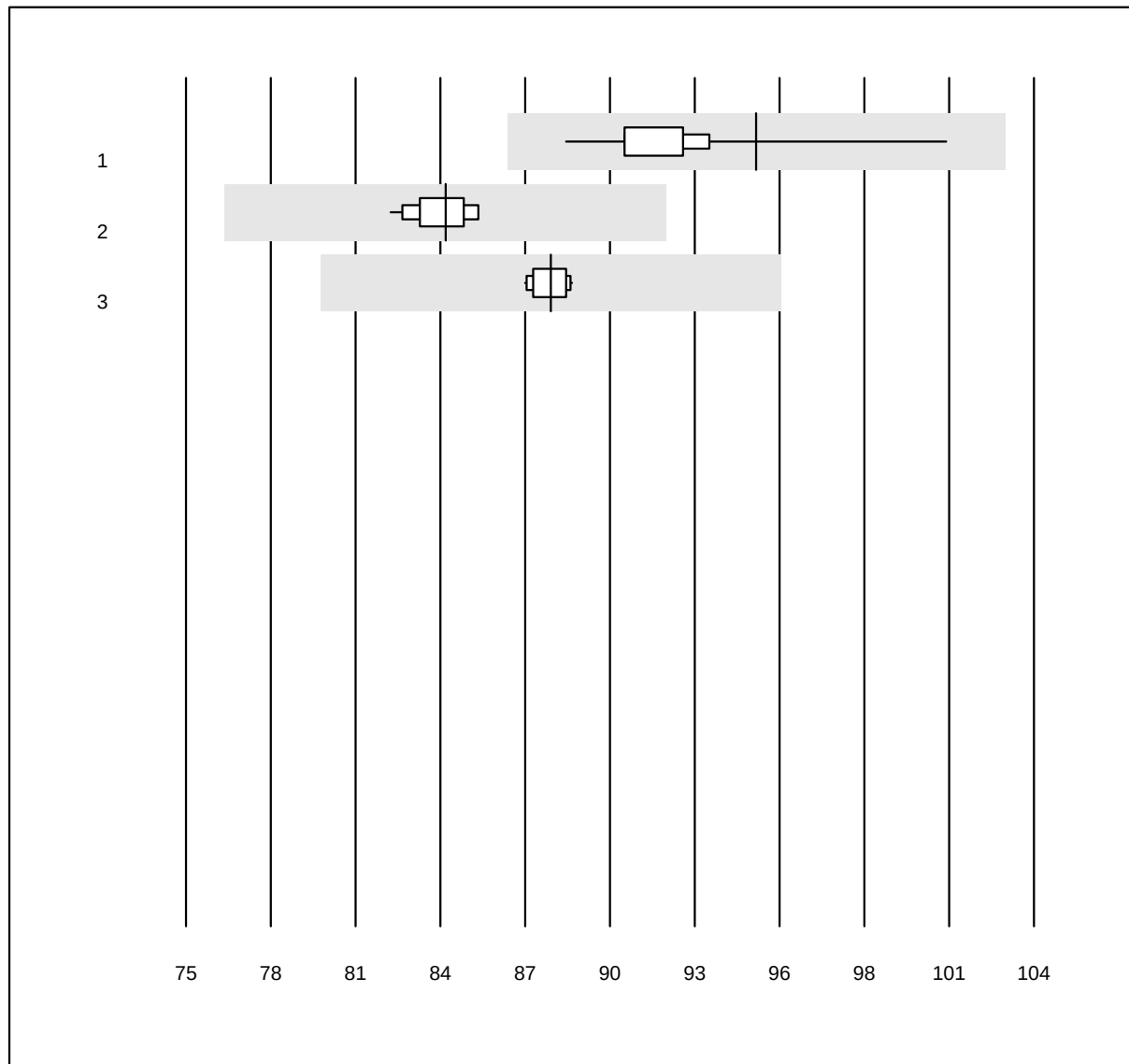


MQ Toleranz: 9%

tHb (g/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	94.5	2.9	a
2 GEM	13	100.0	0.0	0.0	83.9	1.1	e
3 Cobas b 123	14	100.0	0.0	0.0	87.5	0.7	e

O2Hb

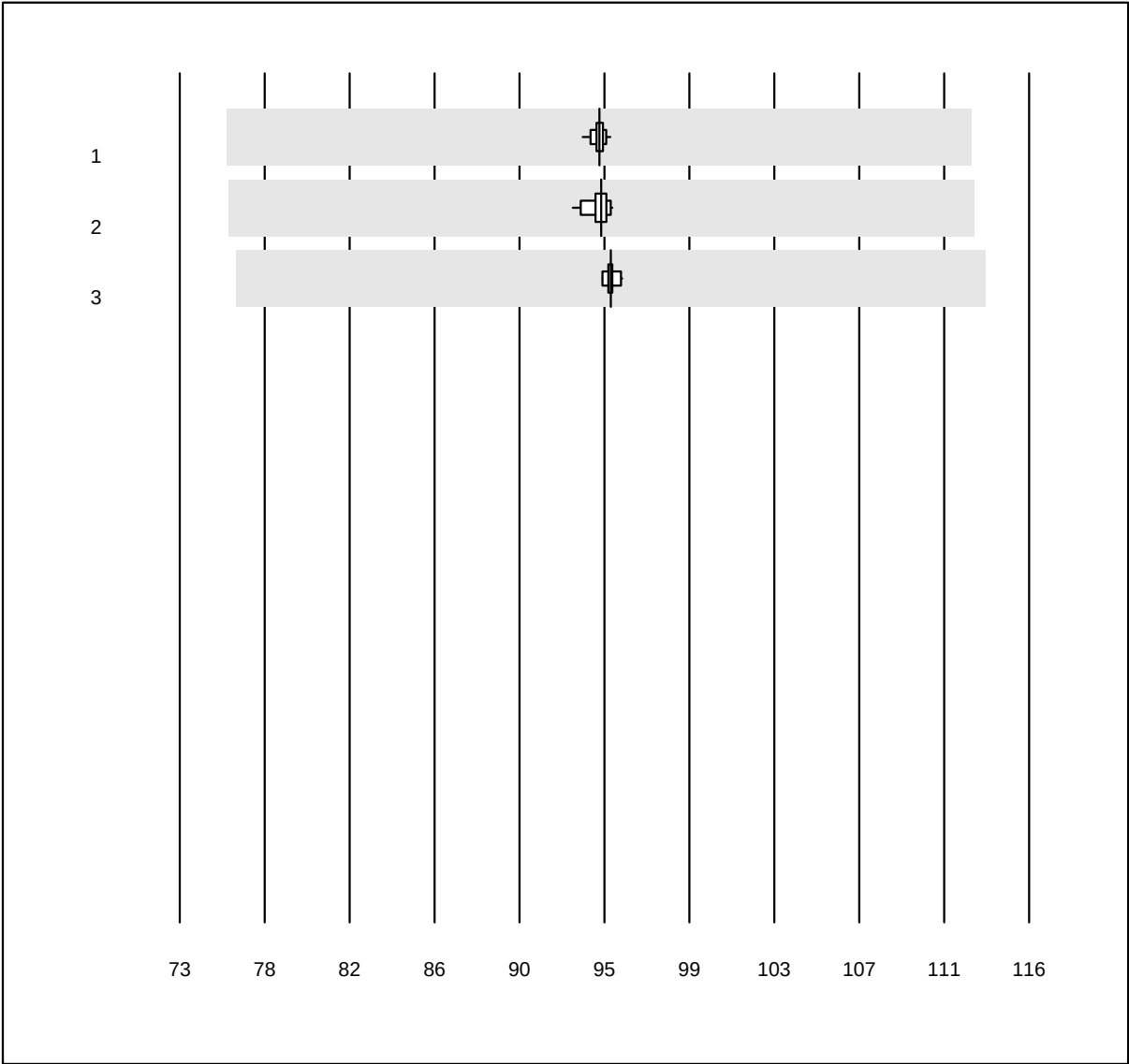


MQ Toleranz: 20%

O2Hb (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	94.2	0.3	e
2 GEM	13	100.0	0.0	0.0	94.3	0.5	e
3 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	94.8	0.3	e

COHb

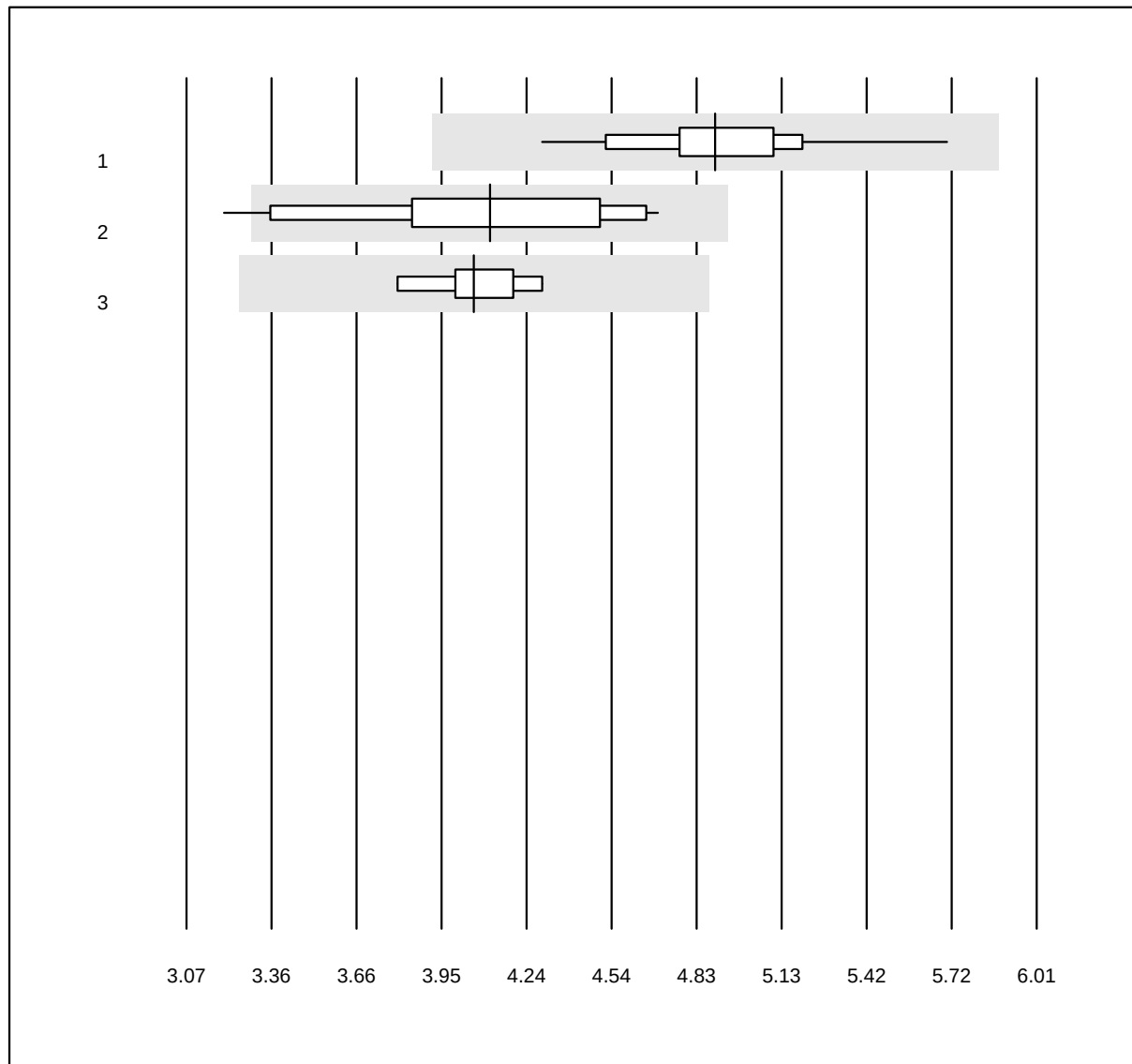


MQ Toleranz: 20%

COHb (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 RAPIDPoint 500	30	100.0	0.0	0.0	4.9	6.0	e
2 GEM	13	92.3	7.7	0.0	4.1	10.5	e*
3 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	4.1	4.3	e

MetHb

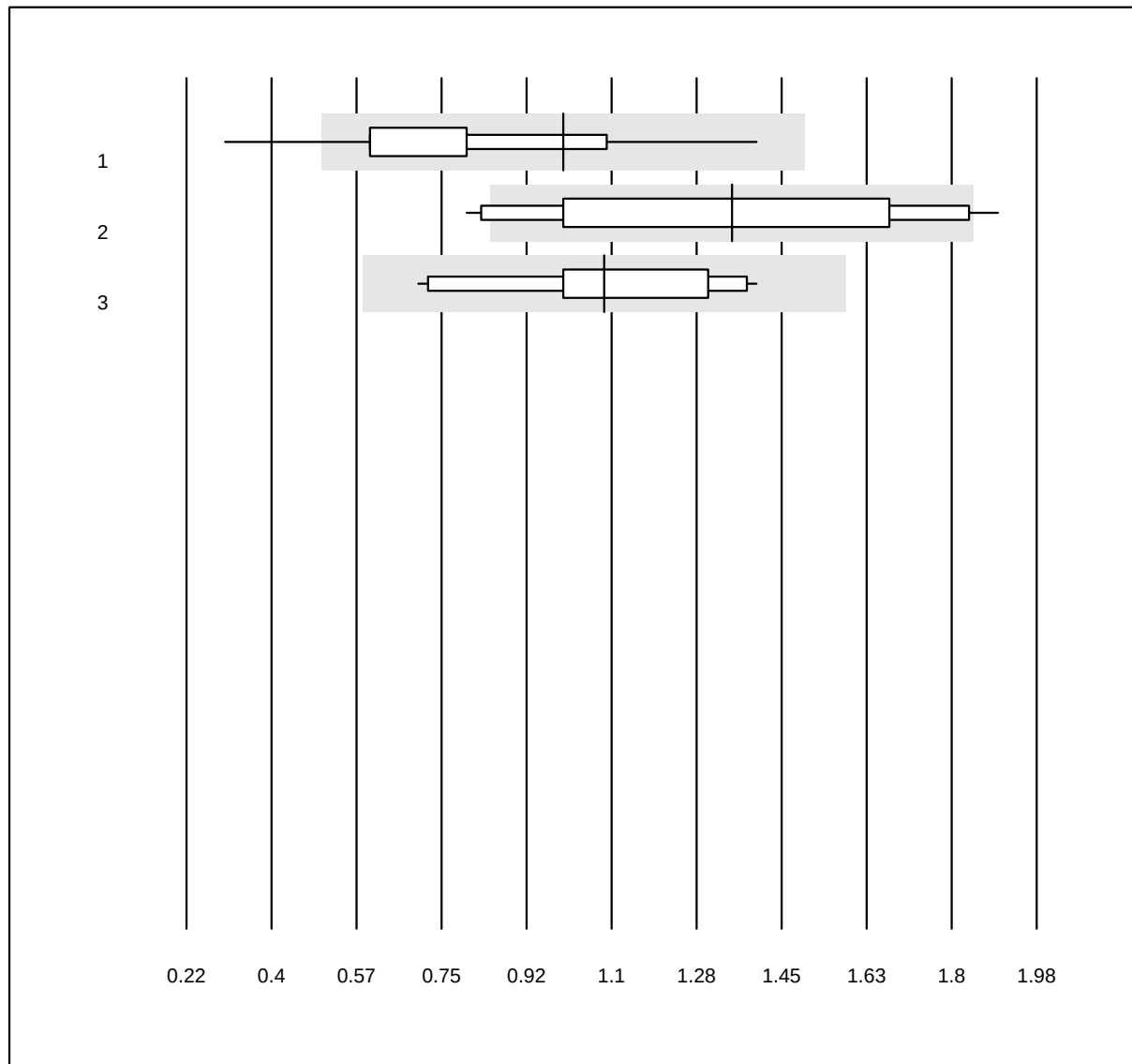


MQ Toleranz: 20%
(< 1.5: +/- 0.5 %)

MetHb (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 RAPIDPoint 500	30	96.7	3.3	0.0	1.0	28.6	a
2 GEM	13	76.9	15.4	7.7	1.3	28.3	e*
3 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	1.1	19.7	e*

sO2

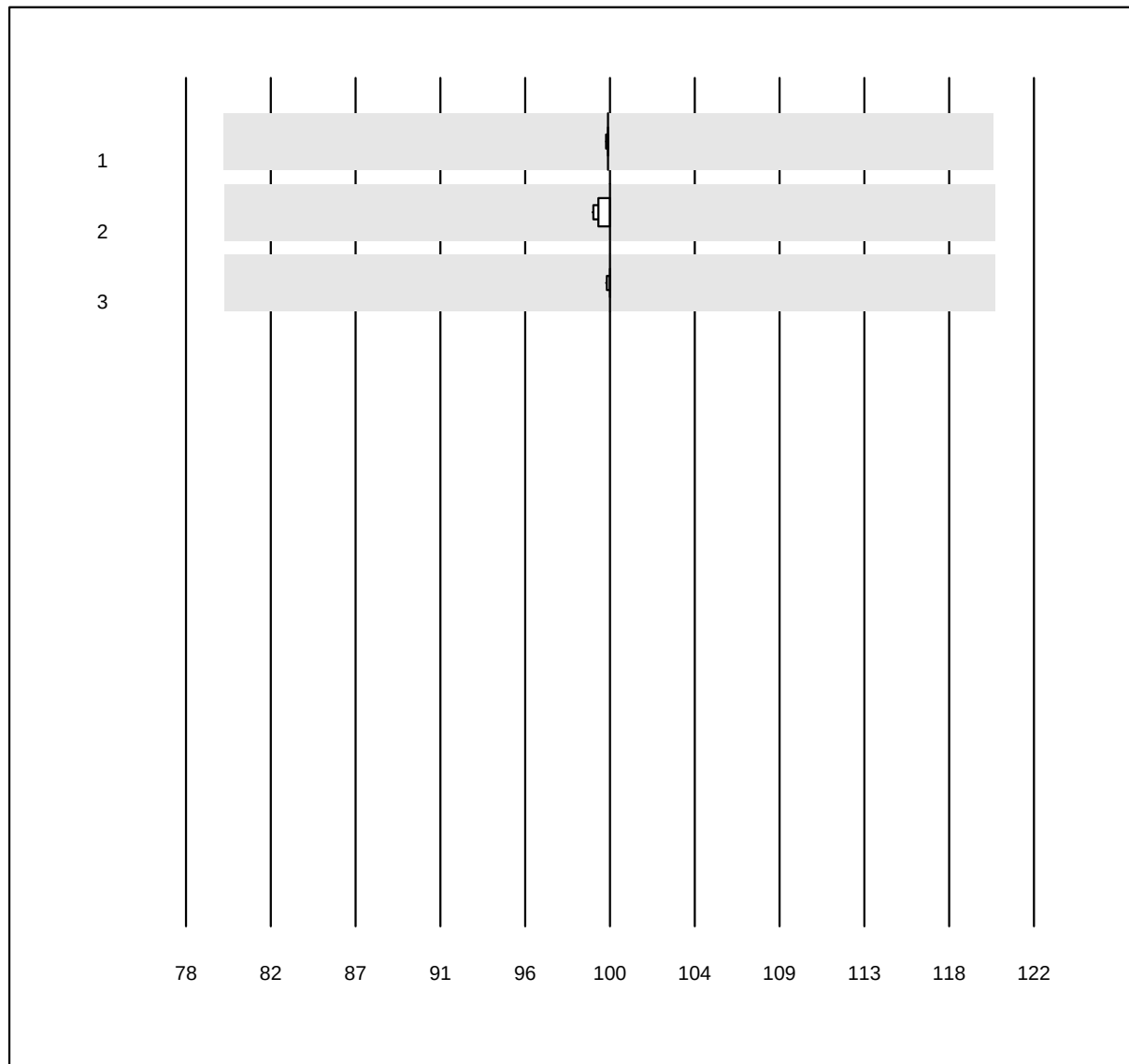


MQ Toleranz: 20%

sO2 (%)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 RAPIDPoint 500	28	100.0	0.0	0.0	99.9	0.0	e
2 GEM	13	100.0	0.0	0.0	100.0	0.4	e
3 Cobas b 123	11	100.0	0.0	0.0	100.0	0.1	e

CTx (CrossLaps)

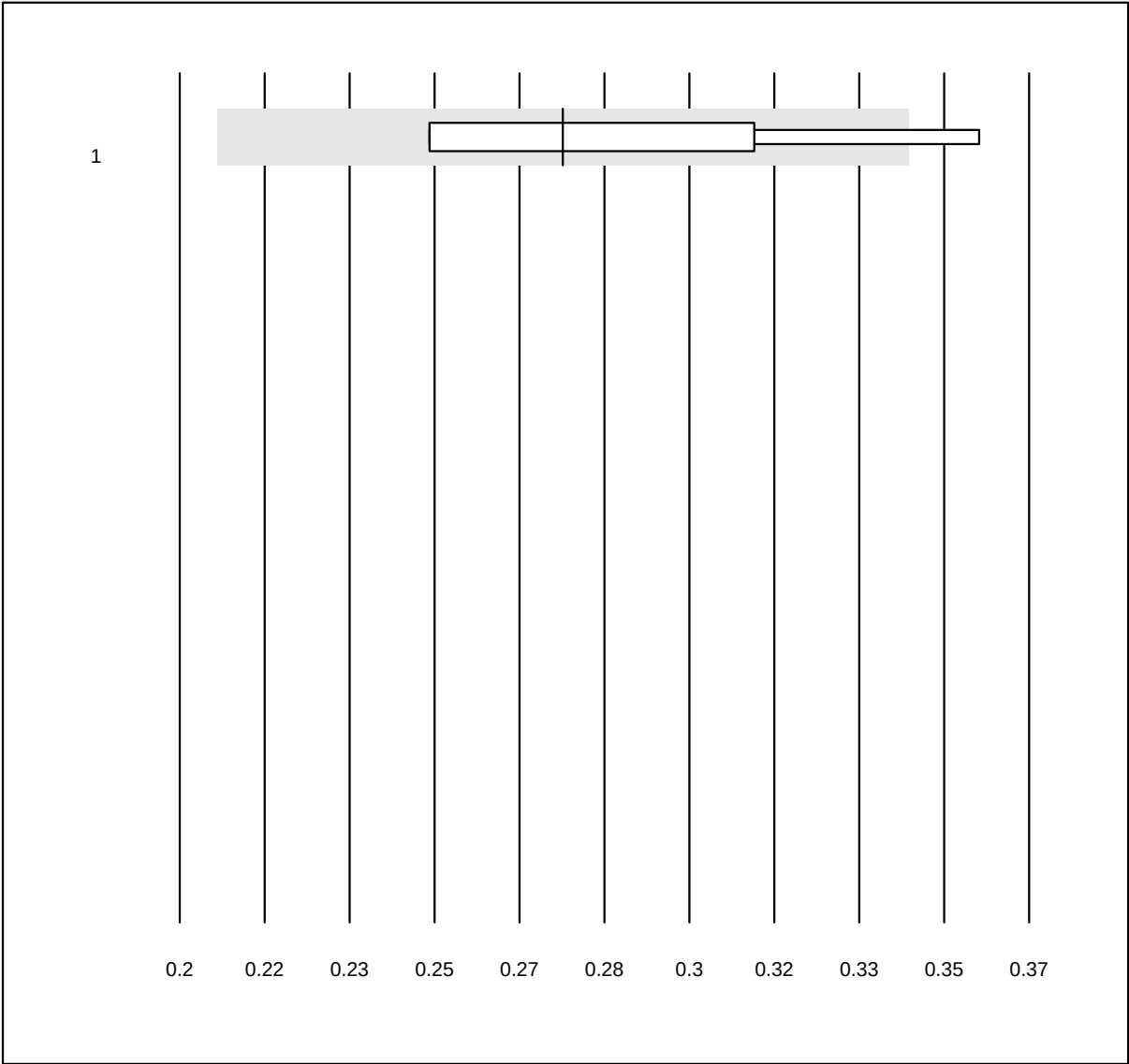


MQ Toleranz: 25%

CTx (CrossLaps) (None)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	5	100.0	0.0	0.0	0.28	13.1	e*

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

P1NP

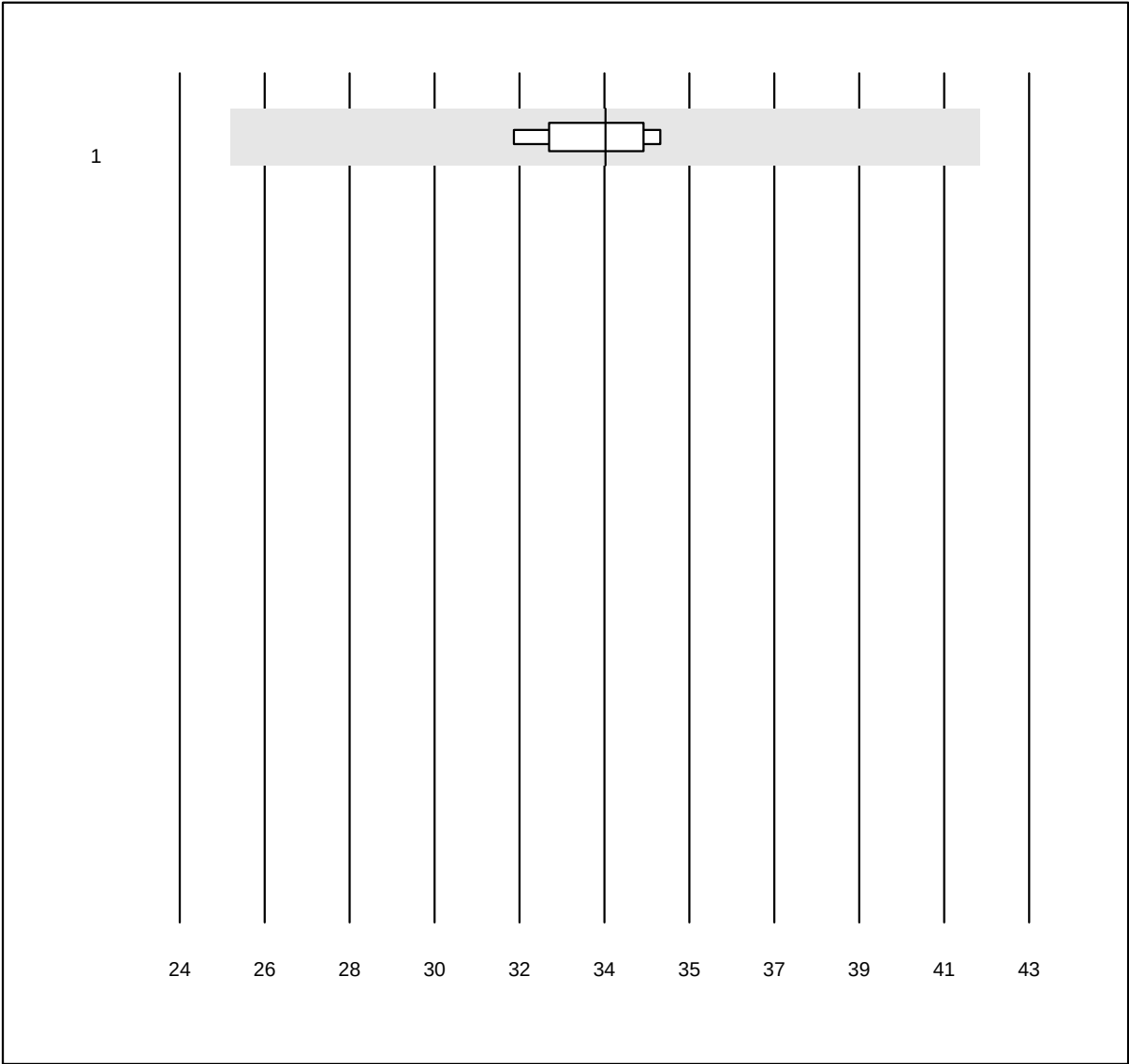


MQ Toleranz: 25%

P1NP (ng/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	33.5	3.3	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Sangue occulto qn

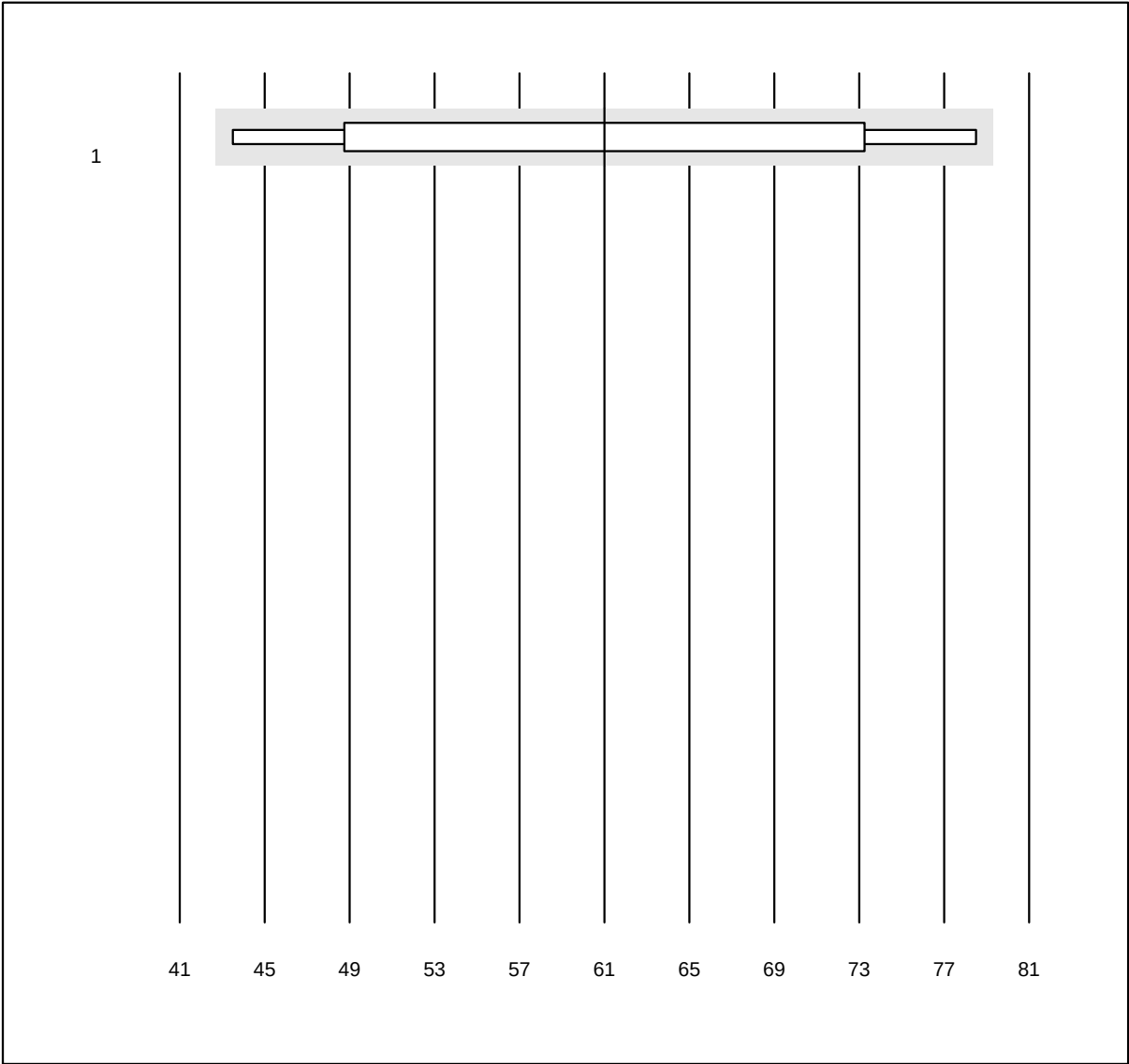


QUALAB Toleranz: 30%

Sangue occulto qn (ng/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	OC-Sensor	10	60.0	0.0	40.0	61	22.2	a*

Amilasi

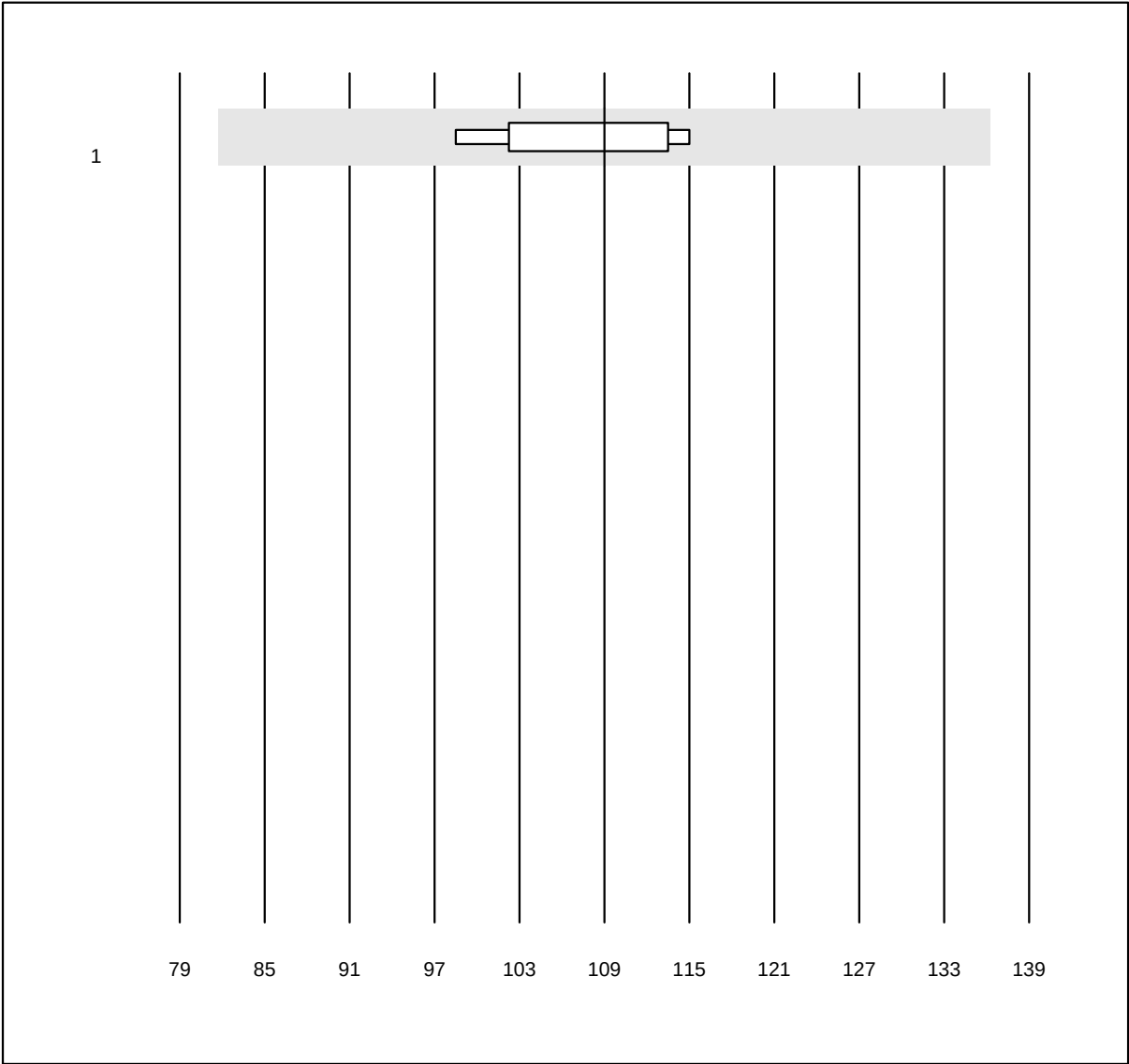


MQ Toleranz: 25%

Amilasi (U/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	IFCC	4	100.0	0.0	0.0	109	5.5	e

Calcio

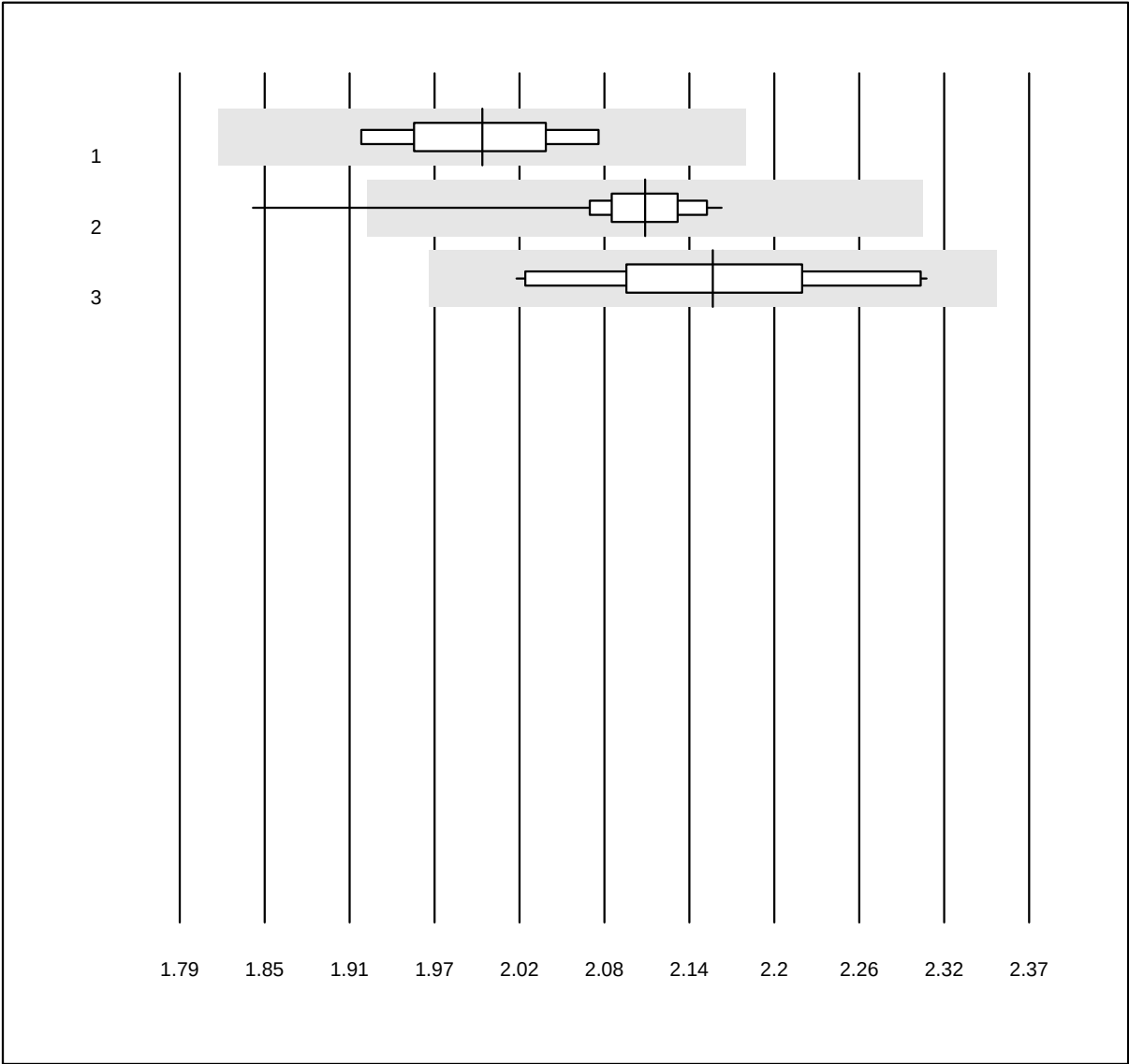


MQ Toleranz: 9%
(< 2.0: +/- 0.18 mmol/l)

Calcio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	5	100.0	0.0	0.0	2.00	2.5	e*
2 Roche	29	96.6	3.4	0.0	2.11	2.8	e
3 altri metodi	10	100.0	0.0	0.0	2.15	4.0	e*

Cloro

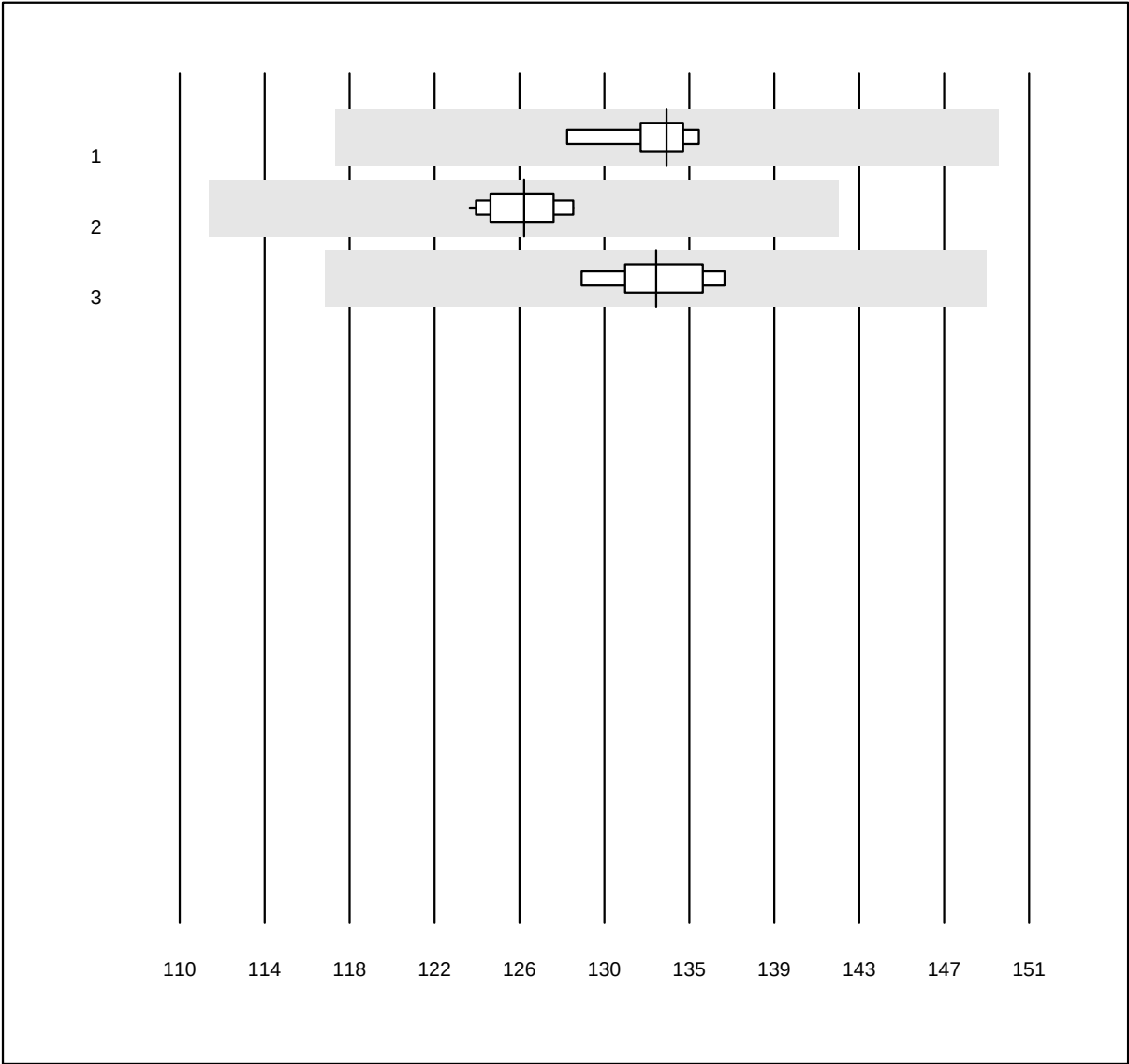


MQ Toleranz: 12%

Cloro (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	134	1.4	e
2 Roche	22	100.0	0.0	0.0	127	1.3	e
3 ISE diretto	6	100.0	0.0	0.0	133	1.6	e

Proteina

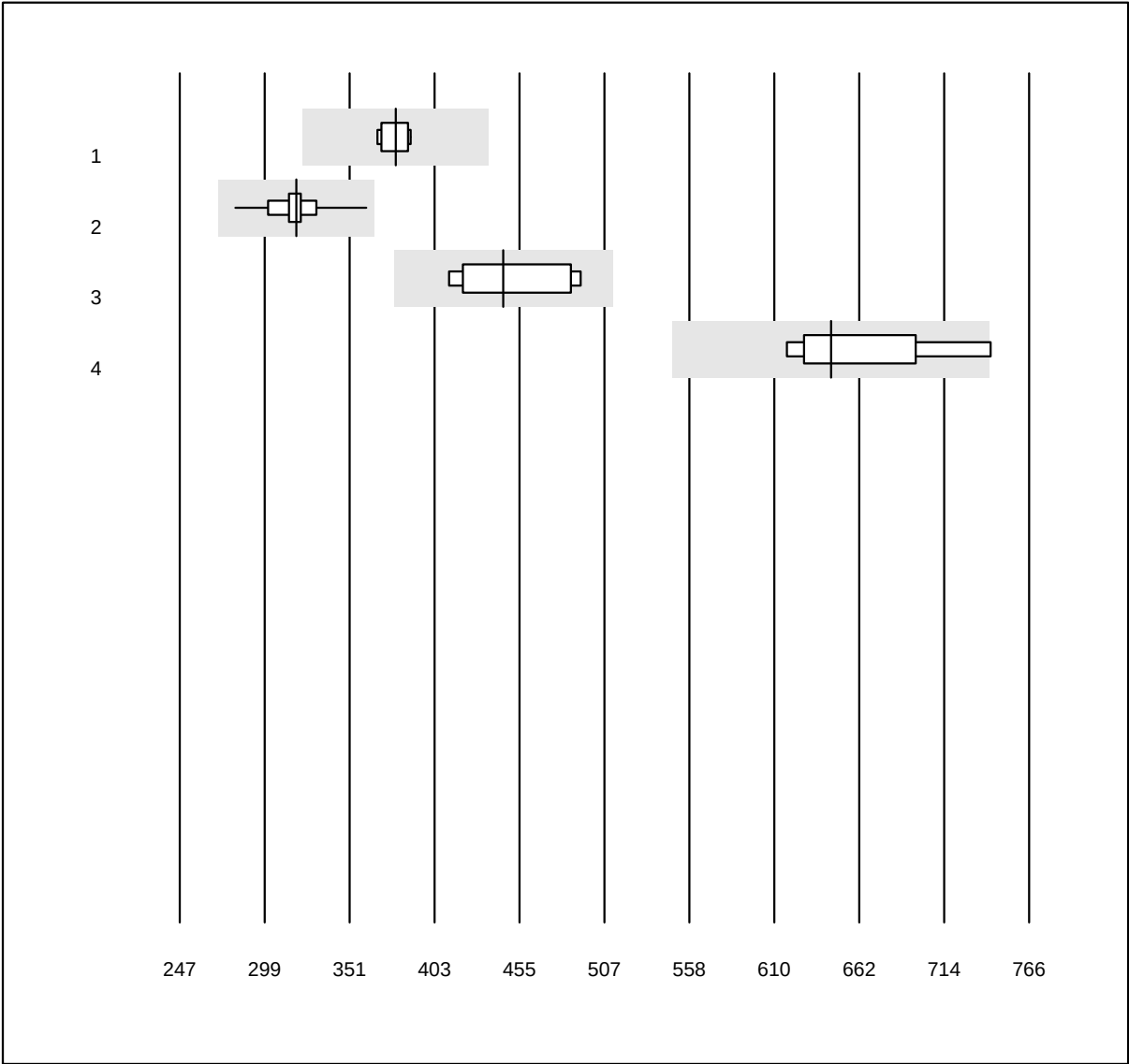


QUALAB Toleranz: 15%

Proteina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	379.0	2.2	e
2 Roche	34	100.0	0.0	0.0	318.2	4.2	e
3 Siemens	7	100.0	0.0	0.0	444.7	7.0	e*
4 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	645.0	5.8	e*

Glucosio

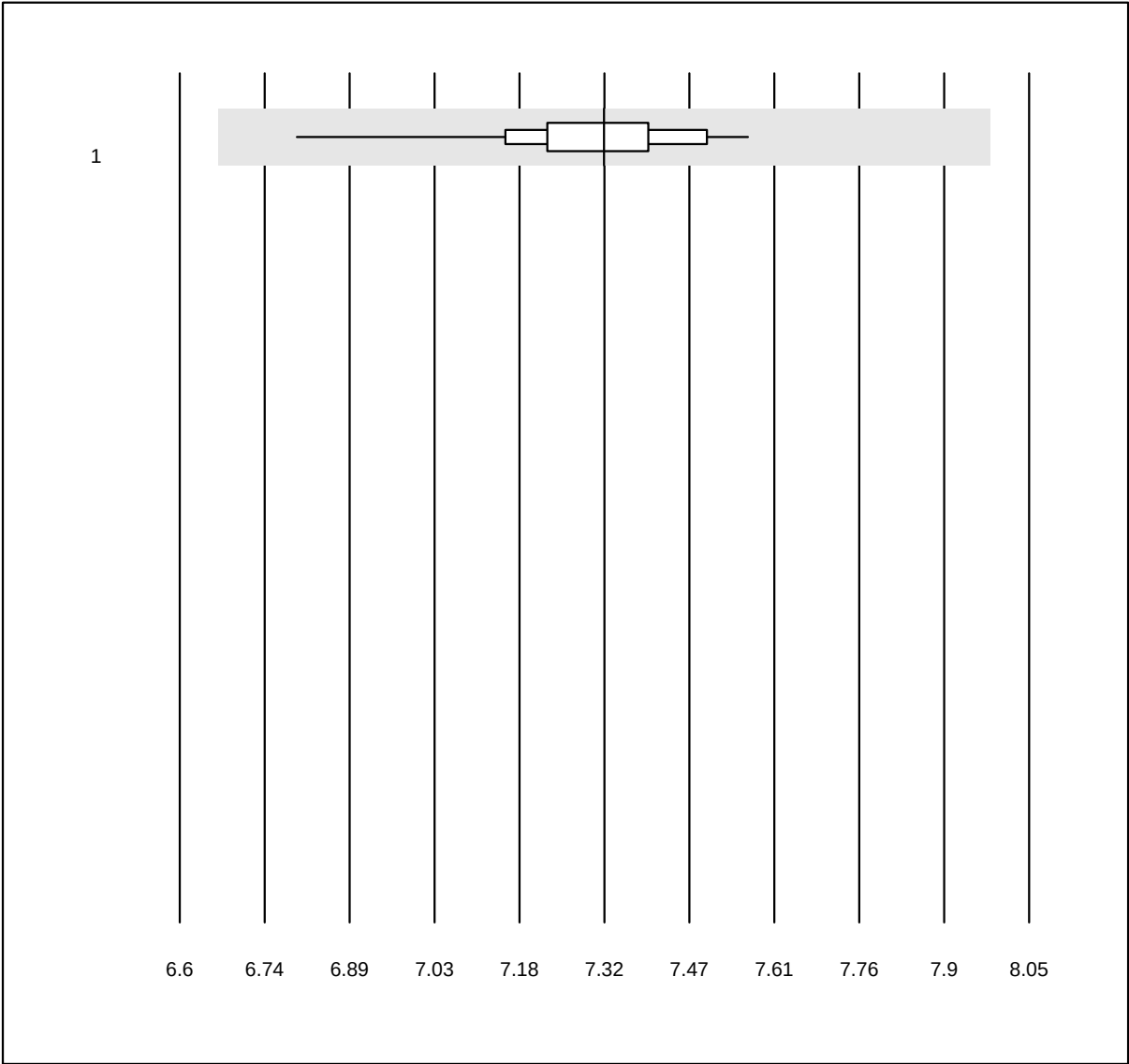


QUALAB Toleranz: 9%

Glucosio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Chimica umida	32	100.0	0.0	0.0	7.3	2.2	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Acido urico

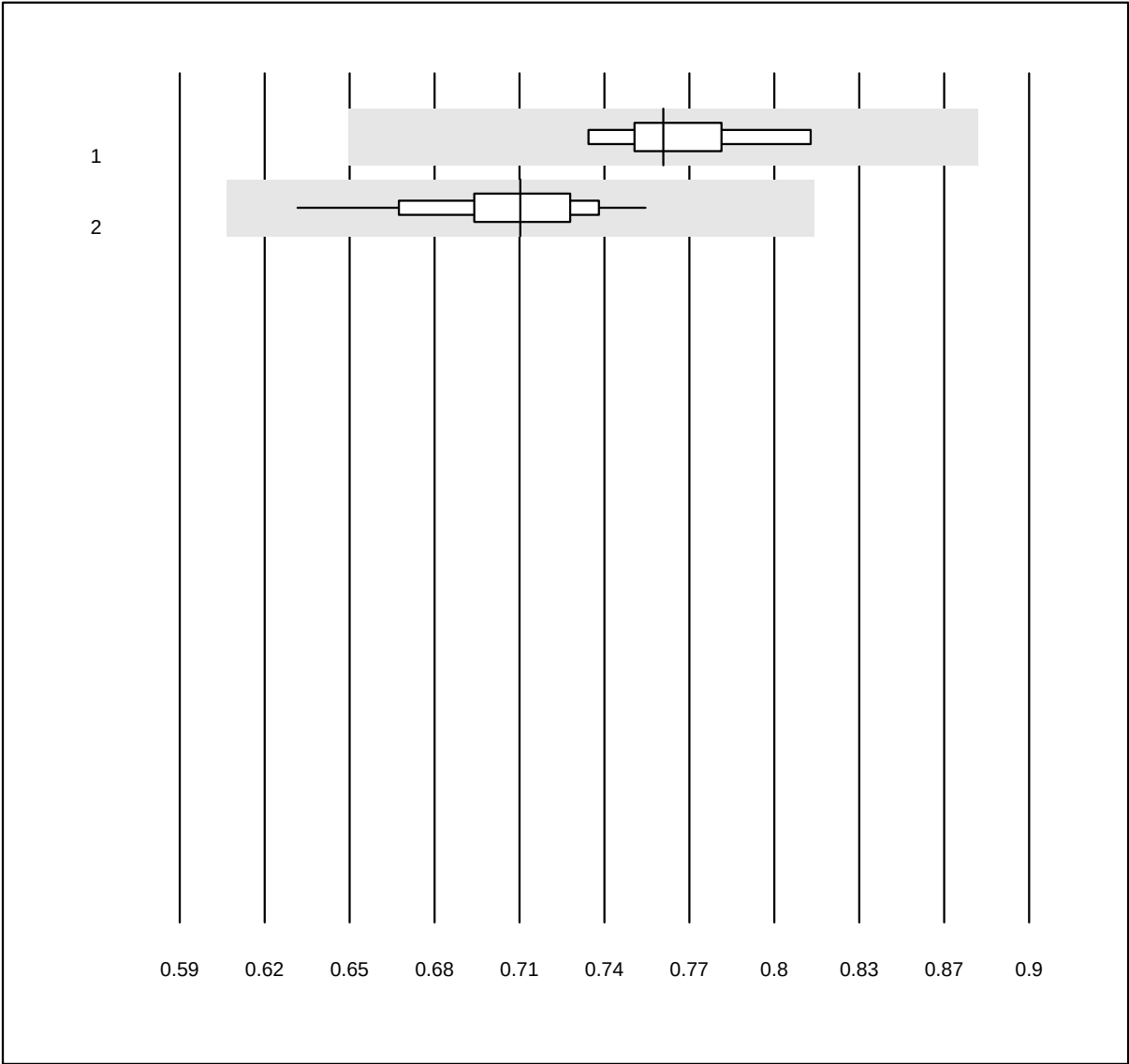


MQ Toleranz: 15%

Acido urico (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens	6	100.0	0.0	0.0	0.77	3.0	e
2 Chimica umida	29	100.0	0.0	0.0	0.71	3.9	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Urea

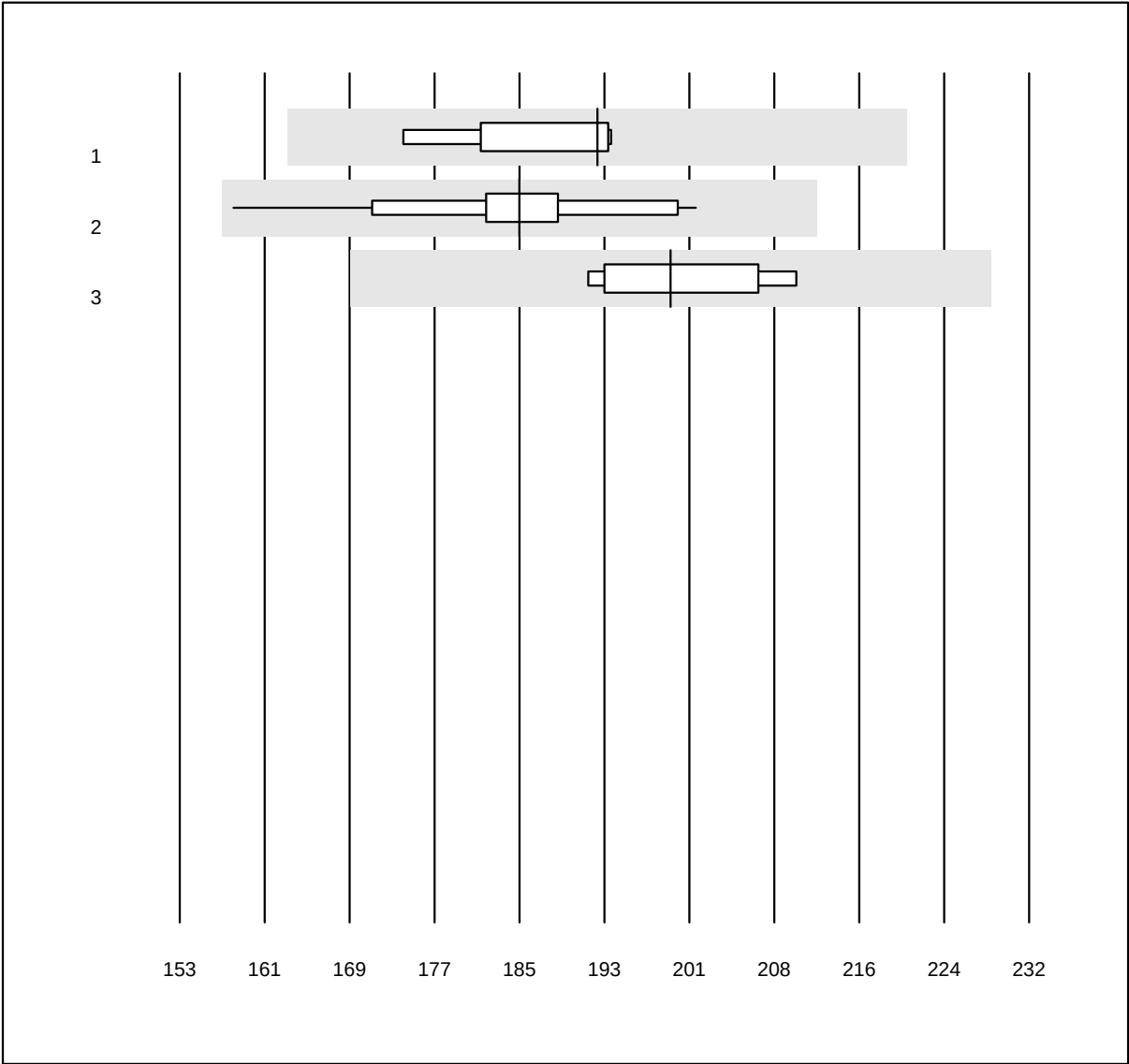


MQ Toleranz: 15%

Urea (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Siemens	6	83.3	0.0	16.7	192	3.6	e
2	Chimica umida	38	100.0	0.0	0.0	185	4.8	e
3	Vitros	4	100.0	0.0	0.0	199	3.8	e*

Potassio

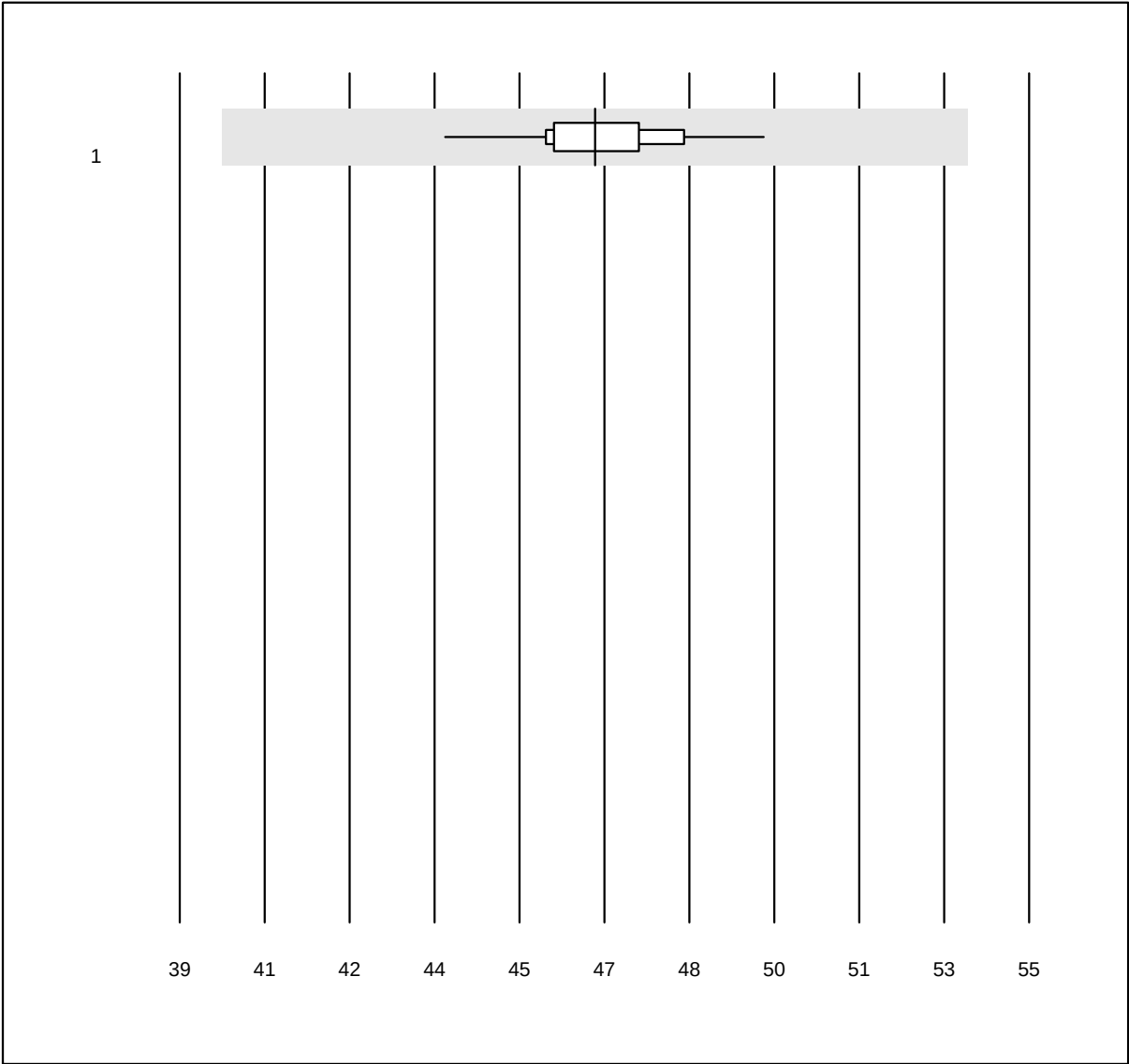


MQ Toleranz: 15%

Potassio (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	49	100.0	0.0	0.0	47	2.3	e

Magnesio

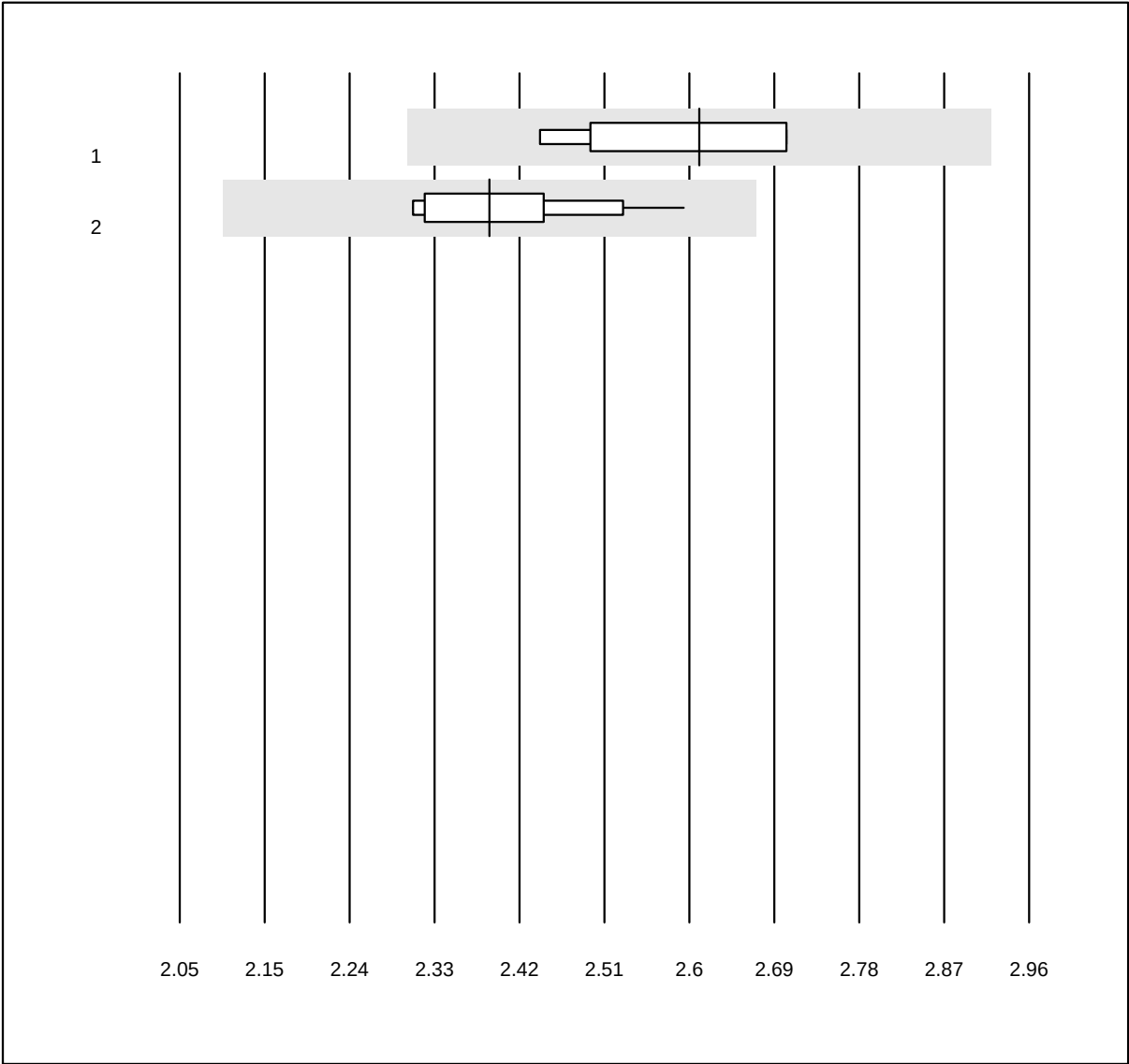

MQ Toleranz: 12%

Magnesio (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 AAS	5	100.0	0.0	0.0	2.61	4.1	e*
2 Chimica umida	24	100.0	0.0	0.0	2.38	3.5	e

Sodio




MQ Toleranz: 15%

Sodio (mmol/l)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	49	100.0	0.0	0.0	115	3.0	e

Osmolalità

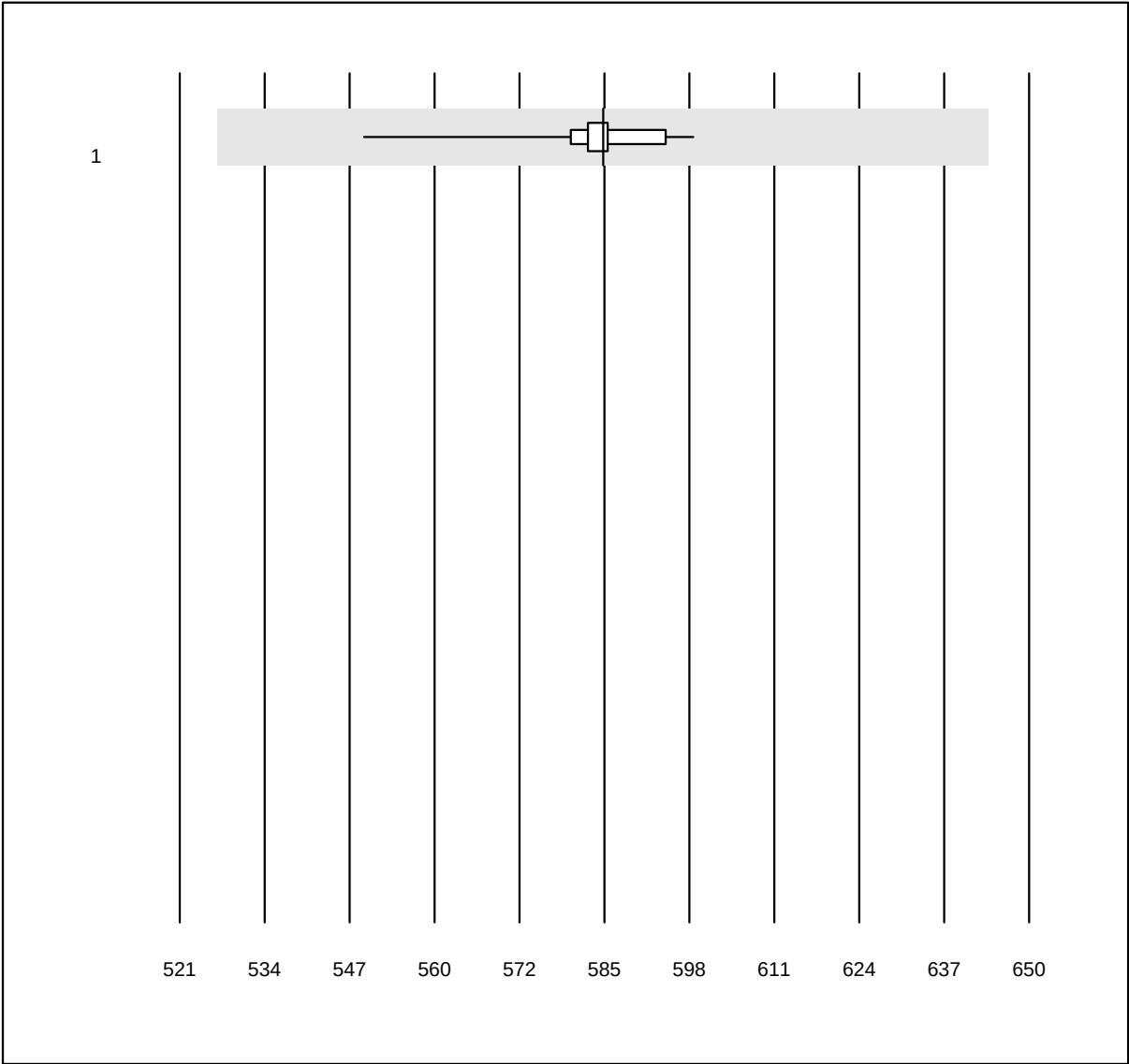


MQ Toleranz: 10%

Osmolalità (mosm/kg)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Crioscopia	24	95.8	0.0	4.2	585	1.5	e

Amilasi pancr. urina

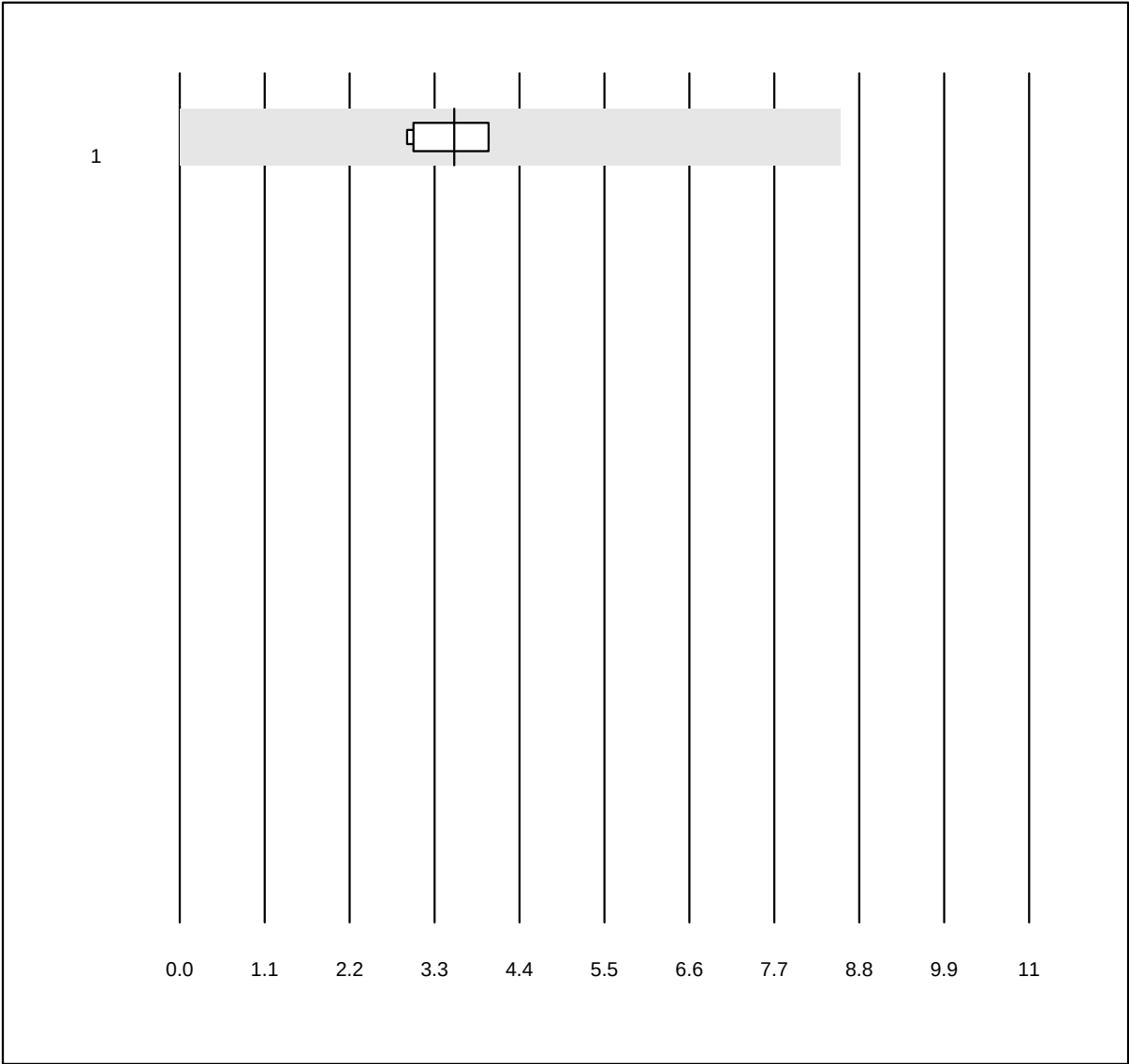


MQ Toleranz: 18%
(< 25.0: +/- 5.0 U/l)

Amilasi pancr. urina (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 IFCC	4	100.0	0.0	0.0	3.6	15.5	e

Fosforo

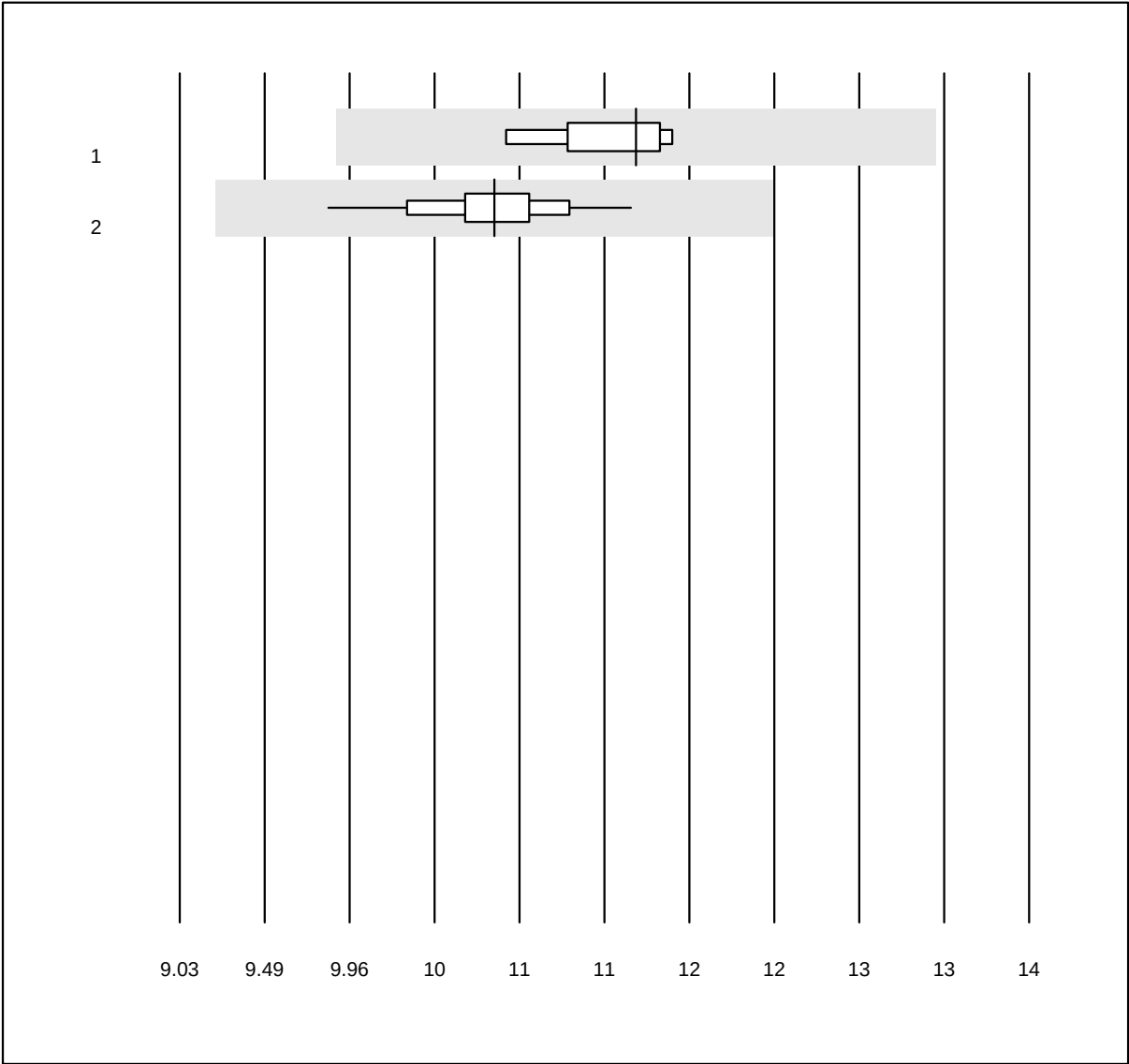


MQ Toleranz: 15%

Fosforo (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	11.7	2.8	e
2 Chimica umida	28	100.0	0.0	0.0	10.9	3.4	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Peso Specifico

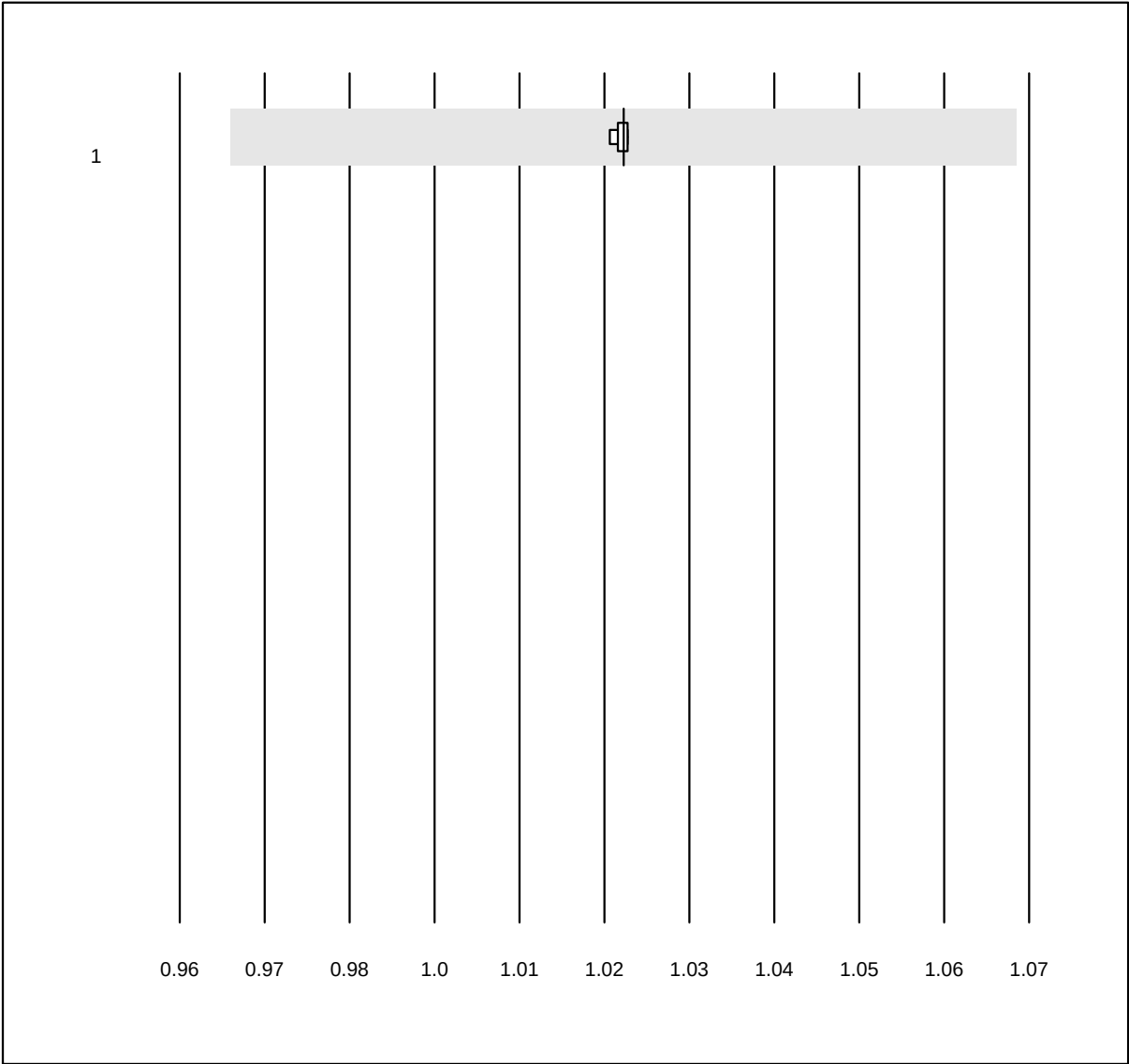


MQ Toleranz: 5%

Peso Specifico (g/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Refrattometro	6	100.0	0.0	0.0	1.018	0.1	e

Microalbumina

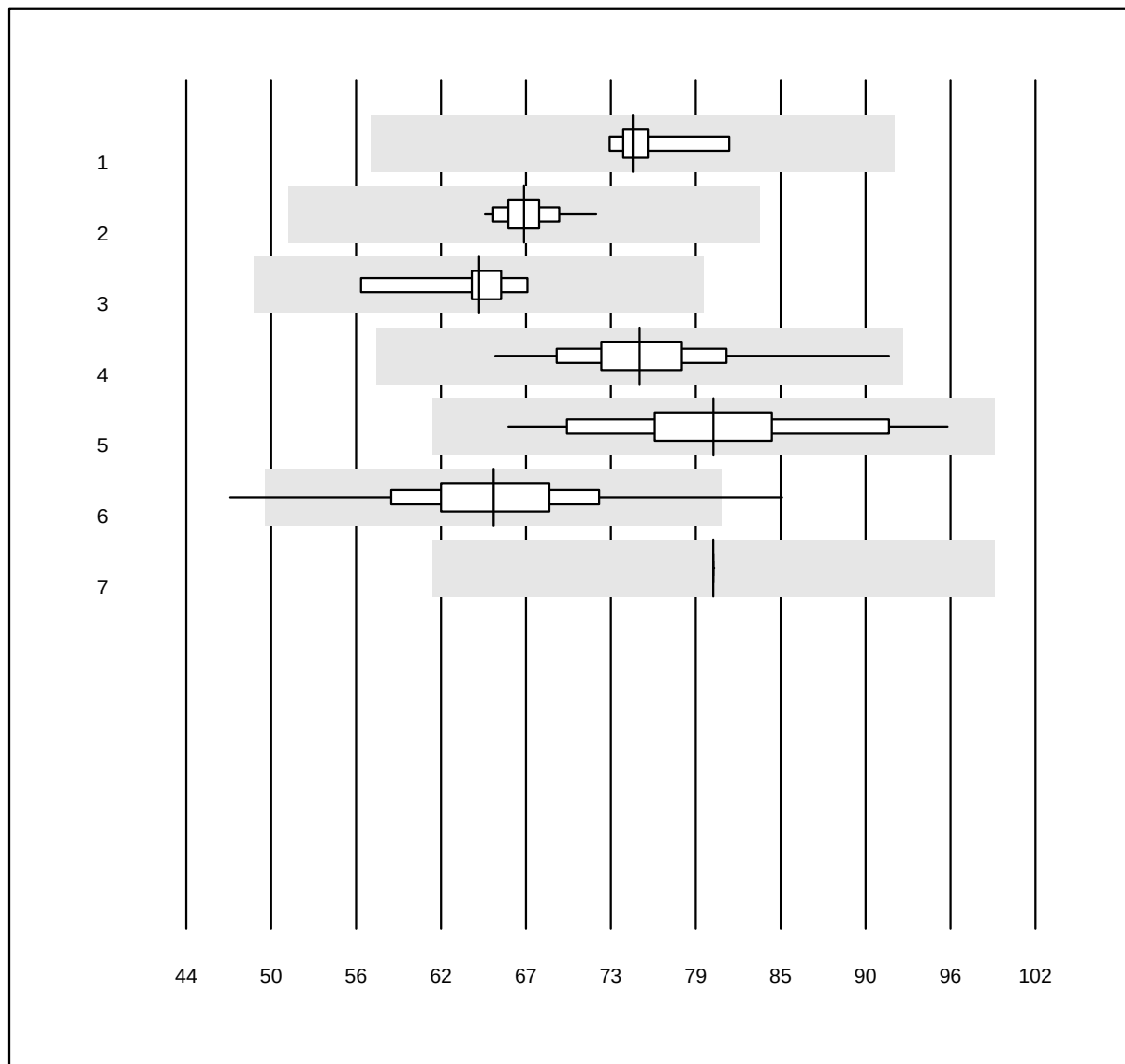


QUALAB Toleranz: 24%

Microalbumina (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	74.5	3.1	e
2 Roche	31	100.0	0.0	0.0	67.1	2.6	e
3 Siemens	8	87.5	0.0	12.5	64.0	4.9	a
4 DCA Vantage	171	98.8	0.0	1.2	75.0	5.9	e
5 AFIAS	19	100.0	0.0	0.0	80.0	9.1	e
6 Afinion	581	96.6	1.2	2.2	65.0	9.0	e
7 altri metodi	10	80.0	0.0	20.0	80.0	0.0	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Microalbumina sq

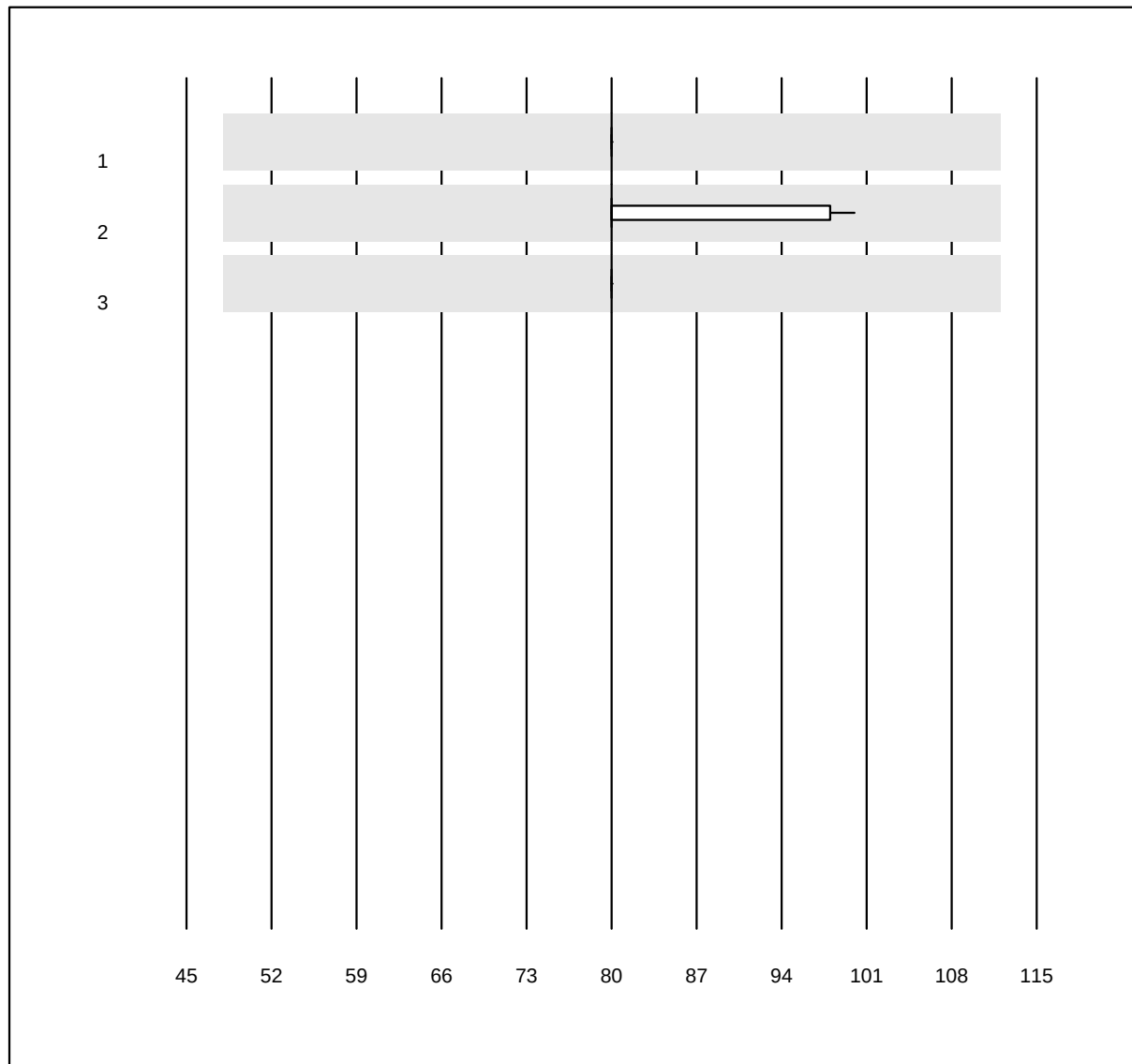


QUALAB Toleranz: 40%

Microalbumina sq (mg/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens Clinitek	21	95.2	0.0	4.8	80.0	0.0	e
2 Aution	22	90.9	0.0	9.1	80.0	7.5	e
3 Sysmex U	20	75.0	0.0	25.0	80.0	0.0	e

Creatinina urina

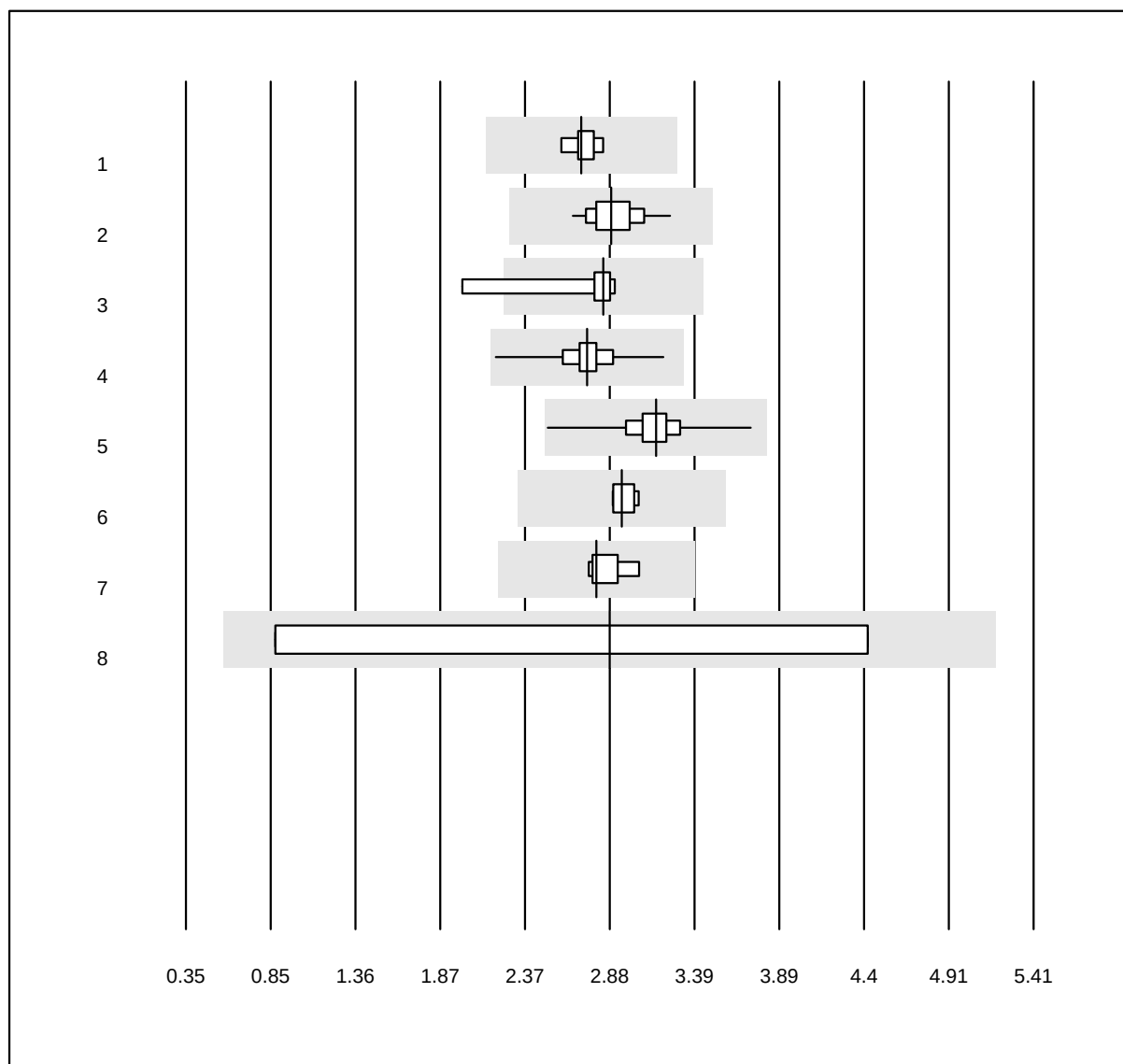


QUALAB Toleranz: 21%

Creatinina urina (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	2.7	2.7	e
2 Roche	38	100.0	0.0	0.0	2.9	4.7	e
3 Siemens	10	80.0	10.0	10.0	2.8	10.3	e*
4 Afinion	574	99.3	0.0	0.7	2.7	4.9	e
5 DCA Vantage	171	95.3	0.0	4.7	3.2	5.2	e
6 Vitros	4	100.0	0.0	0.0	3.0	2.3	e
7 Chimica umida	4	100.0	0.0	0.0	2.8	3.2	e
8 altri metodi	9	100.0	0.0	0.0	2.9	85.7	a*

2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Creatinina urina sq

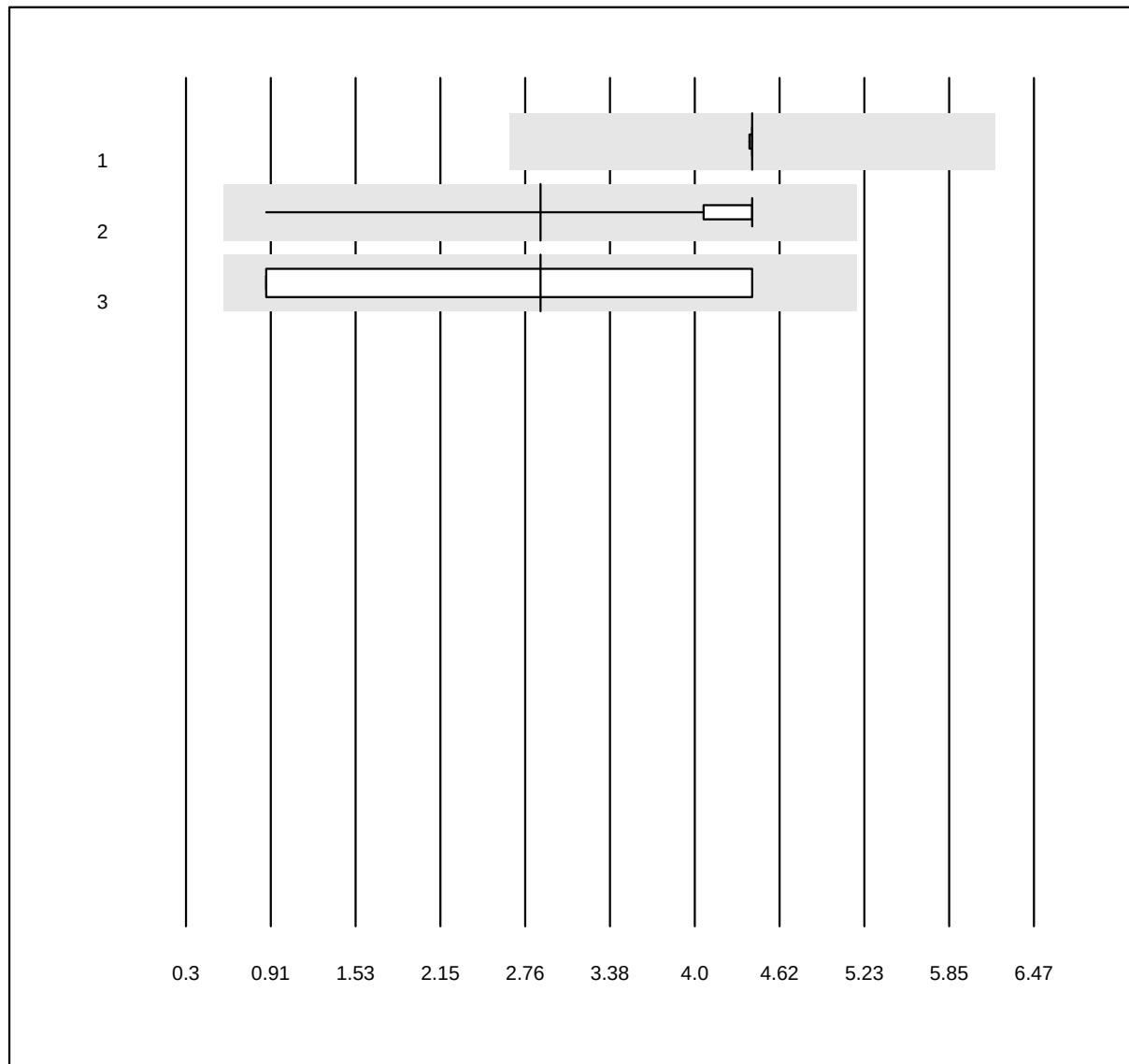


MQ Toleranz: 40%

Creatinina urina sq (mmol/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens Clinitek	21	85.7	0.0	14.3	4.4	0.2	e
2 Aution	22	81.8	0.0	18.2	2.9	19.7	a
3 Sysmex U	18	83.3	0.0	16.7	2.9	65.9	a*

Eritrociti

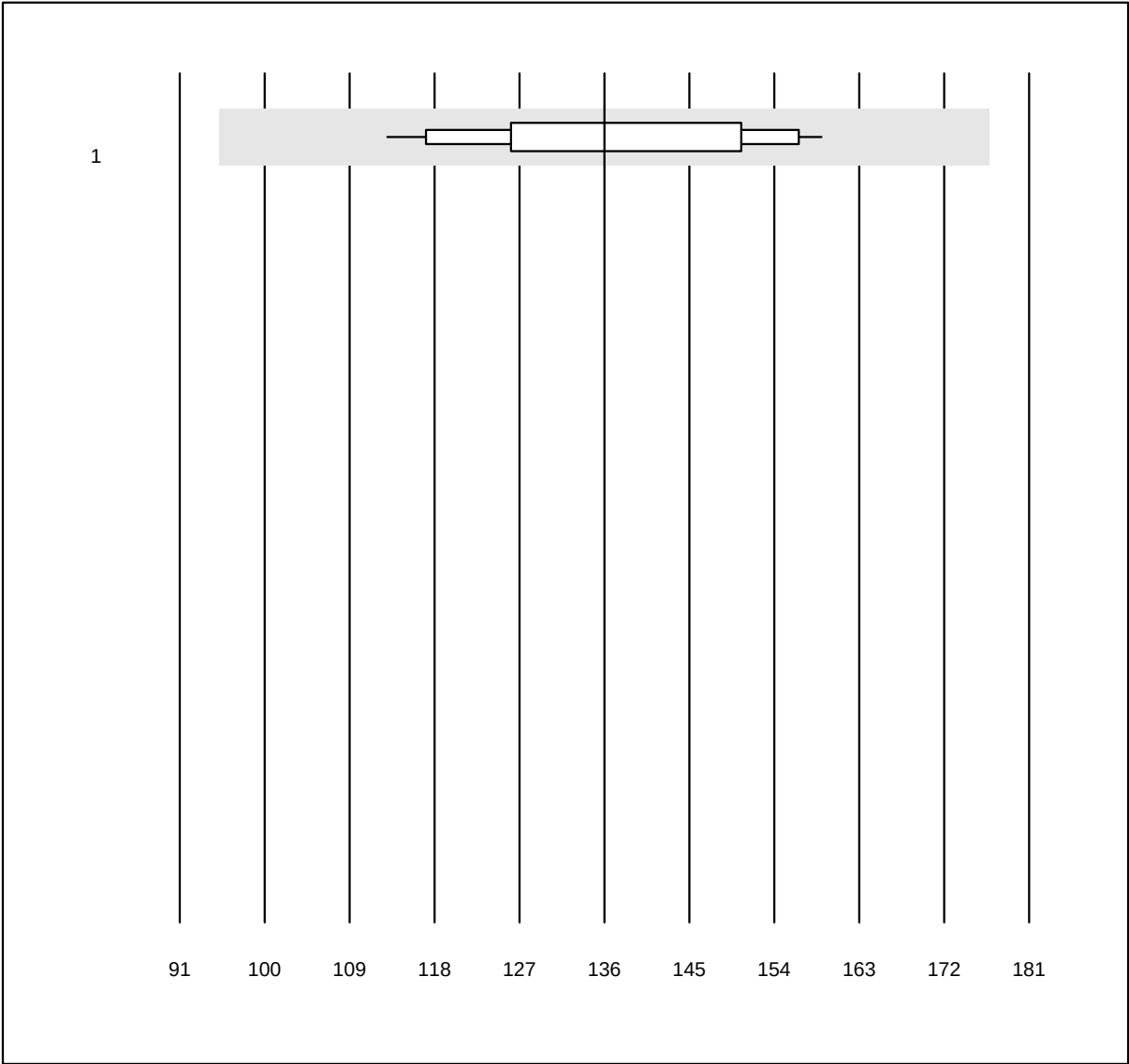


MQ Toleranz: 30%

Eritrociti (/μl)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Sysmex	20	100.0	0.0	0.0	136	10.2	a


2 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

CMV NAT qn

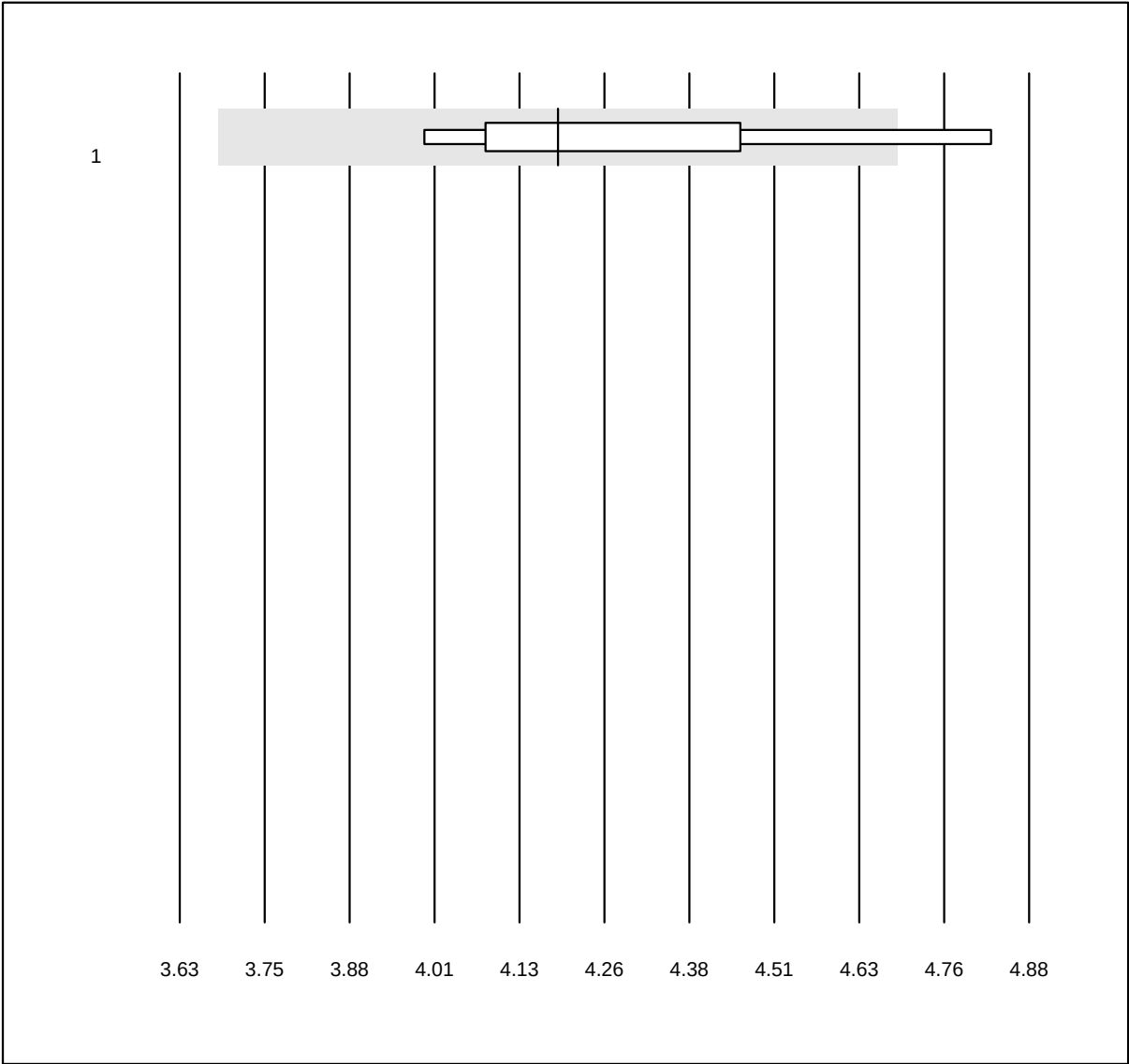

QUALAB Toleranz: 0% (< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)		CMV NAT qn (Log10 IU/ml)					
No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	4.19	5.7	e*


EBV NAT qn

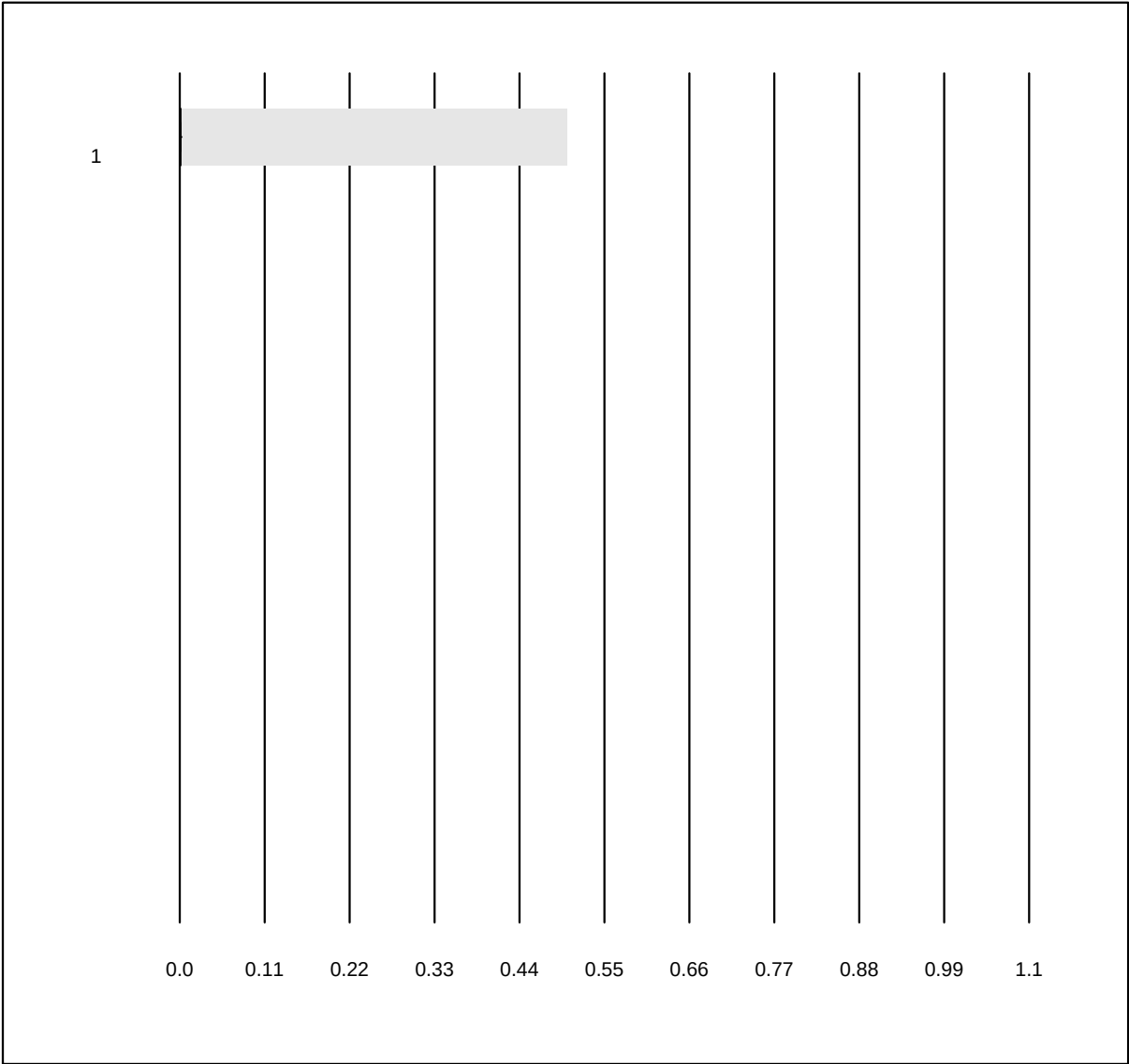

QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)


No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	5	100.0	0.0	0.0	0.00	0.0	e

HBV NAT qn

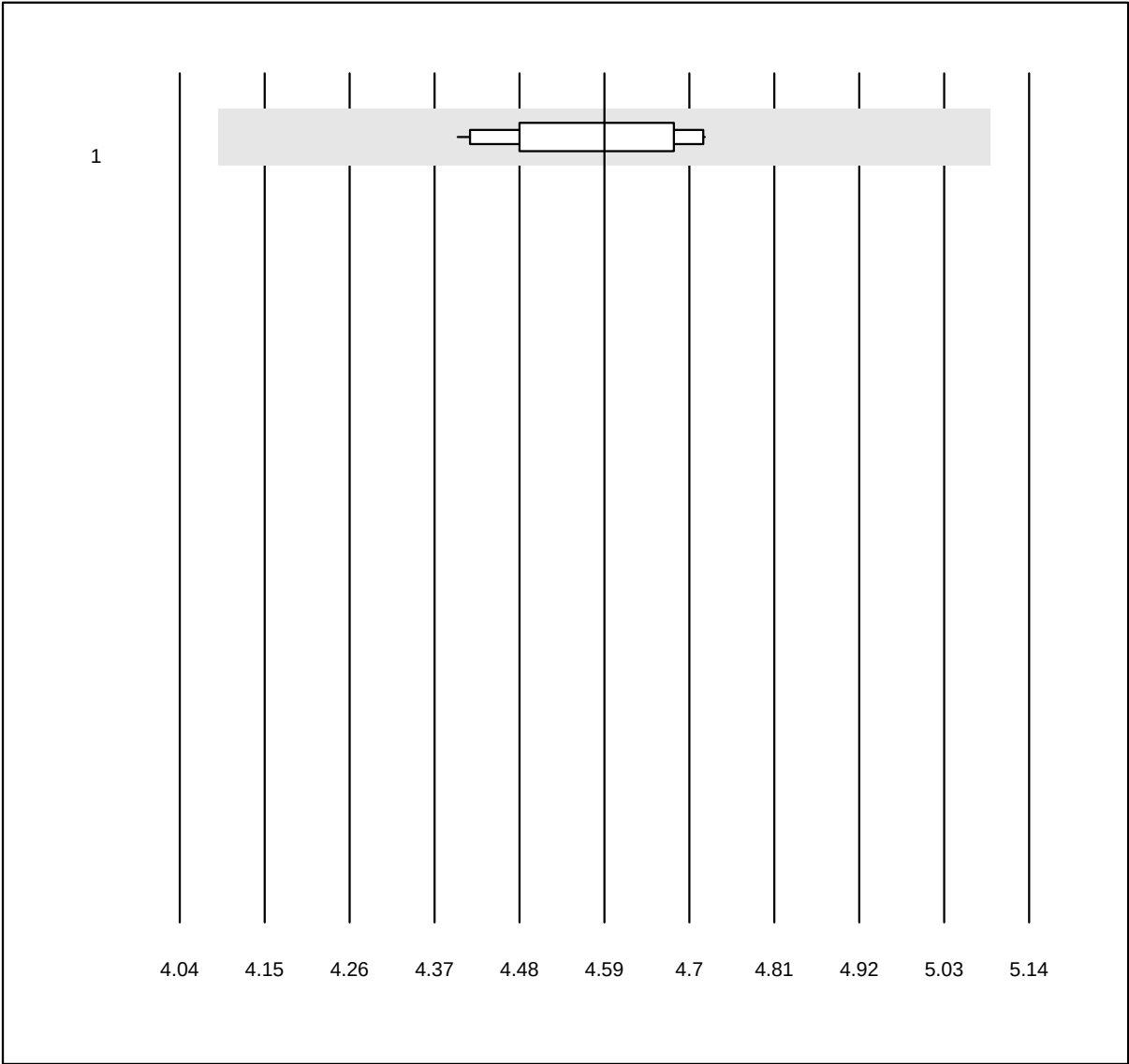

QUALAB Toleranz: 0% (< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)		HBV NAT qn (Log10 IU/ml)					
No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	4.59	2.3	e


HCV NAT qn

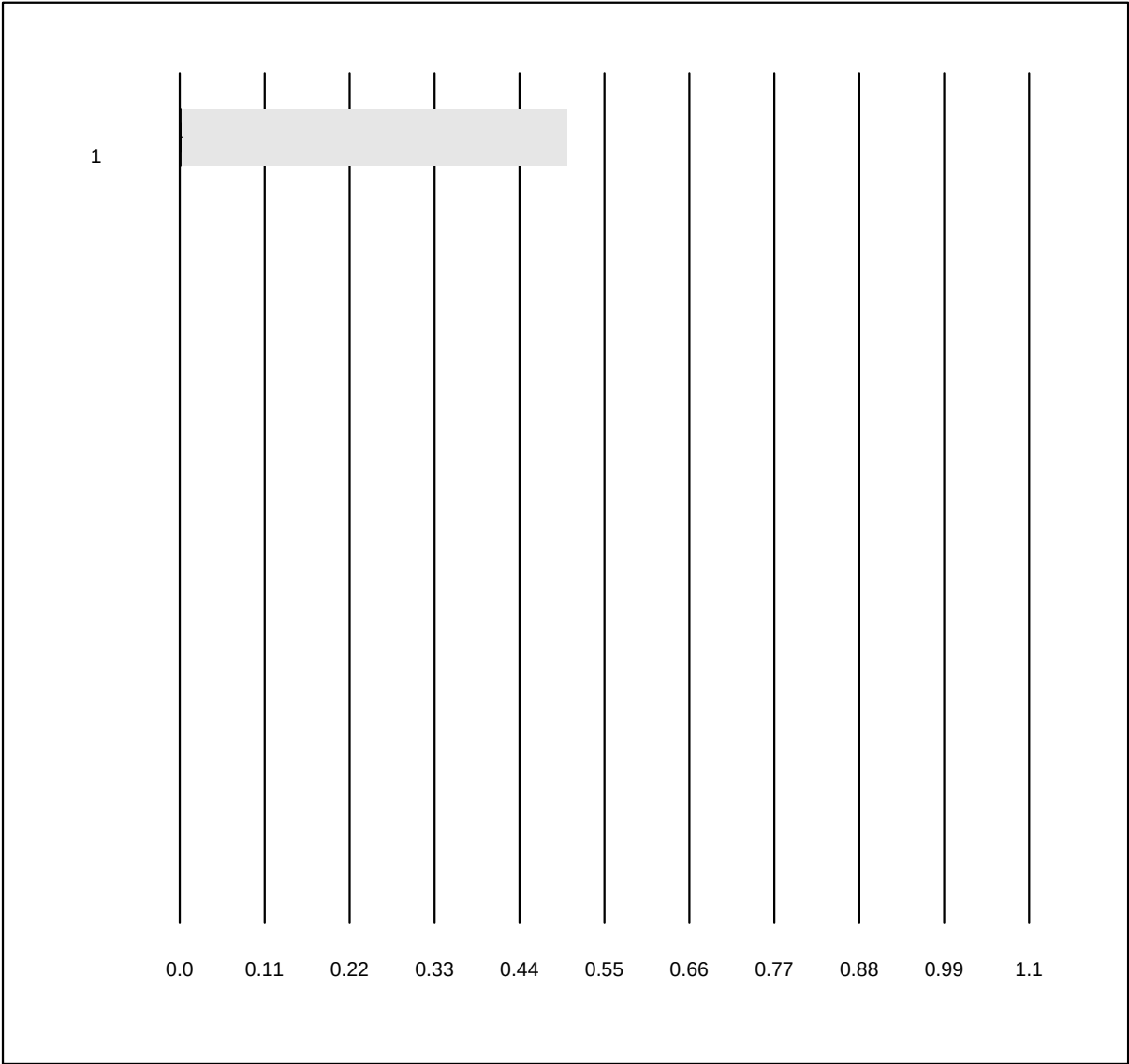

QUALAB Toleranz: 0%
(< 15.0: +/- 0.5 Log10 IU/ml)


No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	0.00	0.0	e

HIV1 NAT qn

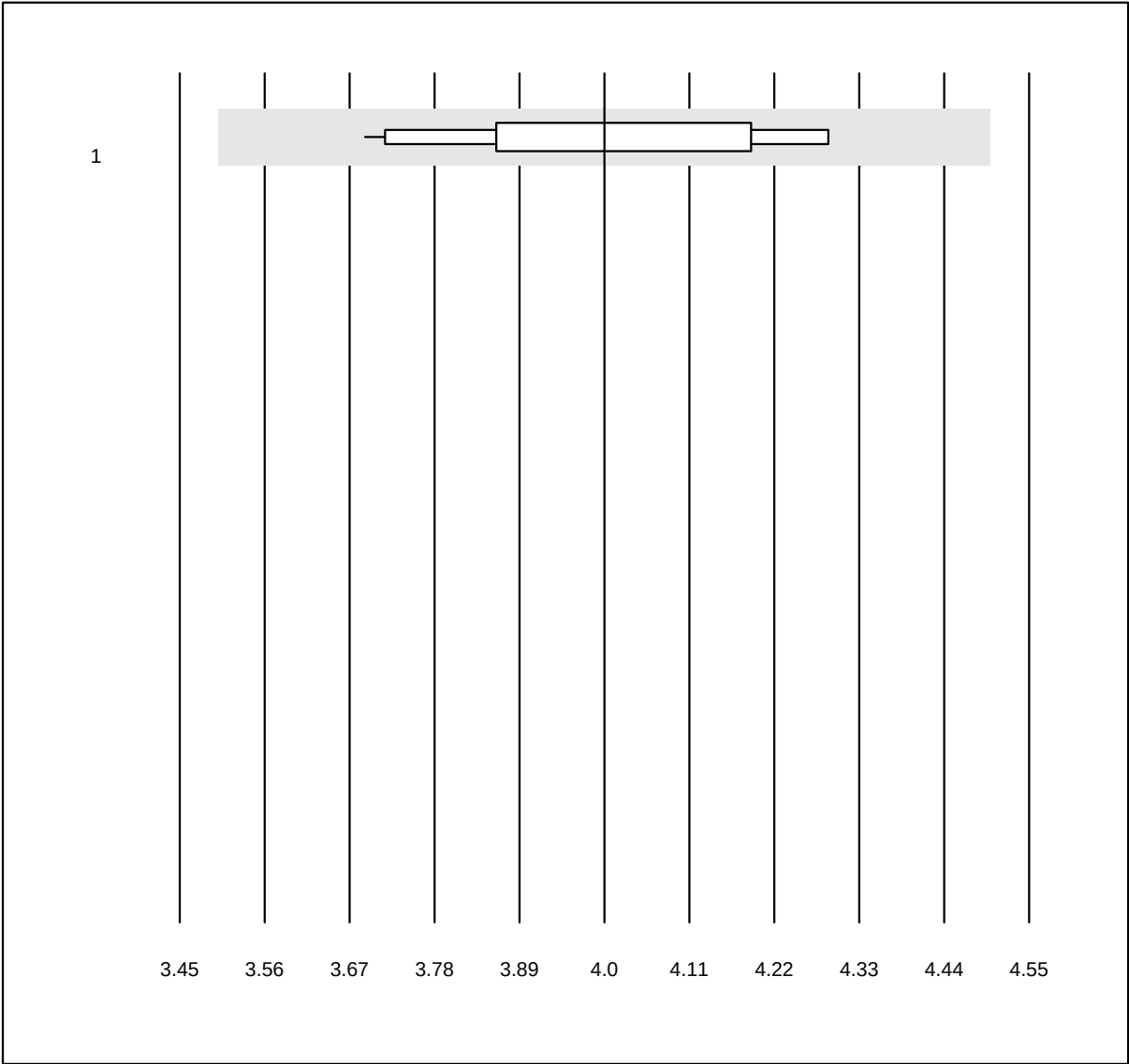

QUALAB Toleranz: 0% (< 15.0: +/- 0.5 Log10 cp/ml)		HIV1 NAT qn (Log10 cp/ml)						
No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo	
1 Tutti i metodi	11	100.0	0.0	0.0	4.00	5.1	a*	

Anti-HBs Ig totale qn campione A

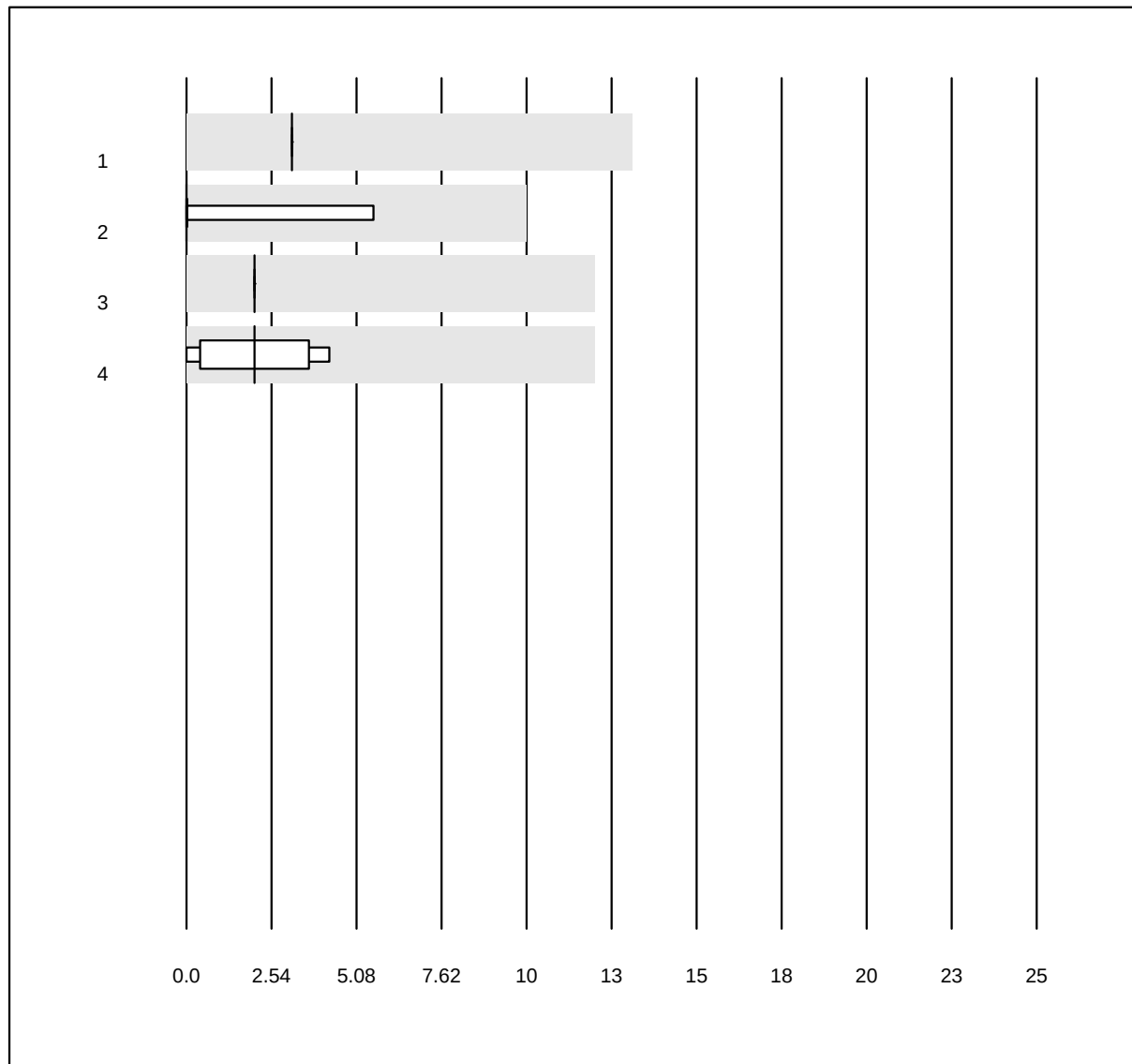


QUALAB Toleranz: 30%
(< 30.0: +/- 10.0 U/l)

Anti-HBs Ig totale qn
campione A (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	3	0.0	e
2 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0	280.9	e
3 Roche	22	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e
4 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	2	84.1	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

HBs Ag qn campione B

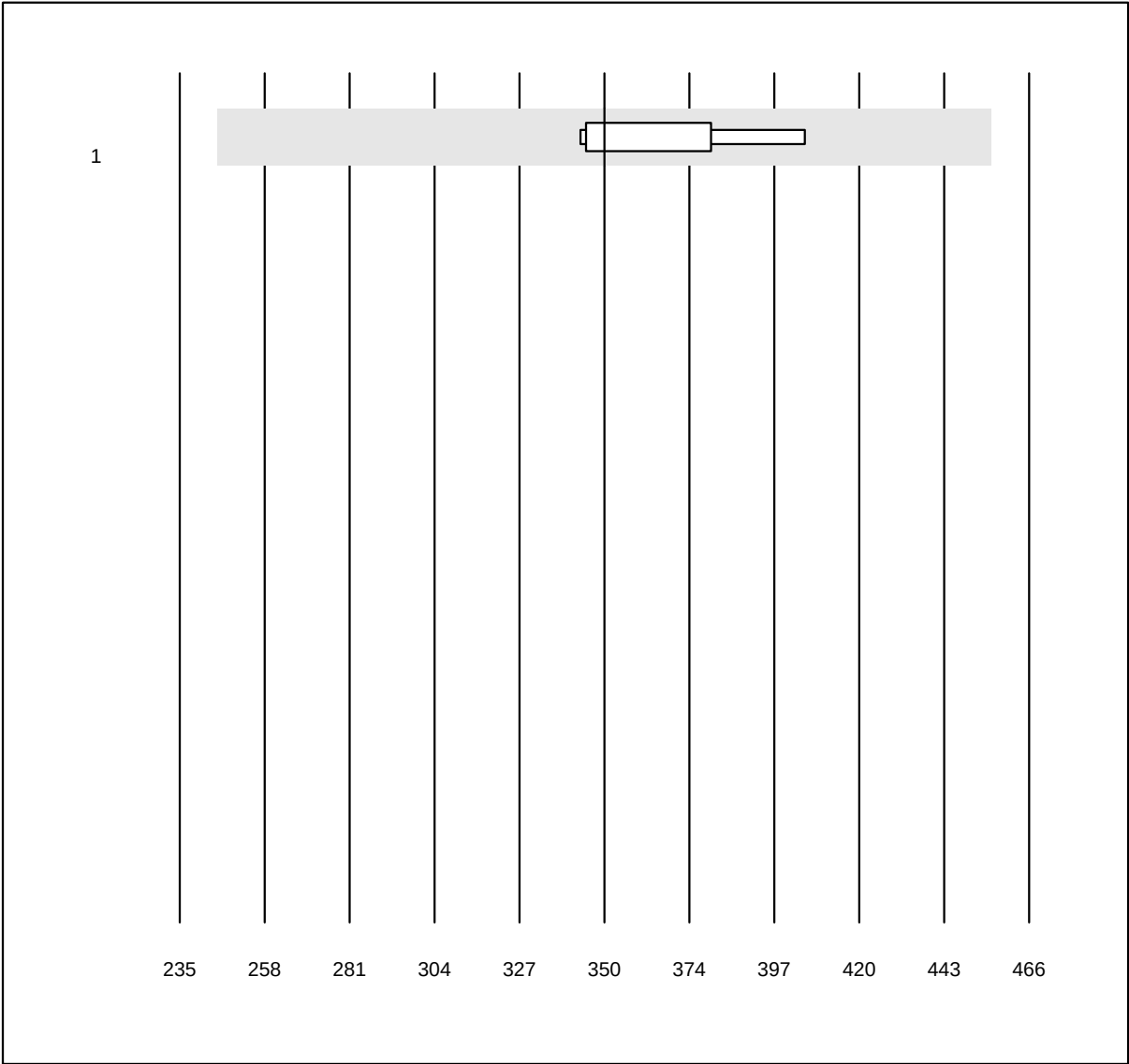


MQ Toleranz: 30%

HBs Ag qn campione B
(U/ml)

No. Metodo		Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1	Roche	4	100.0	0.0	0.0	351	5.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

Anti-HBs Ig totale qn campione B

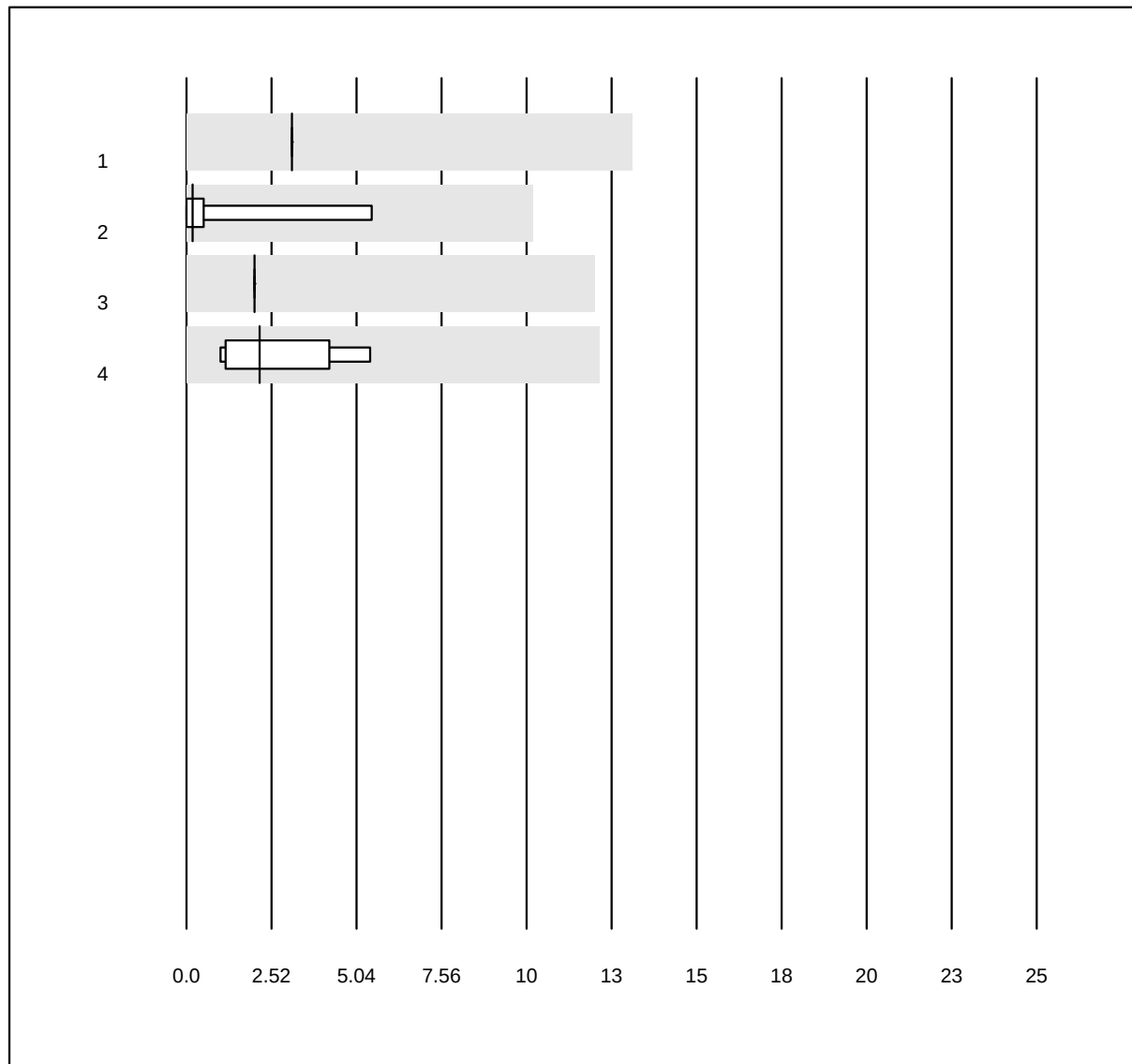

QUALAB Toleranz: 30%
(< 30.0: +/- 10.0 U/l)

Anti-HBs Ig totale qn
campione B (U/l)

No. Metodo	Totale	% OK	% insuff.	% outlier	Risultato giusto	VK %	Tipo
1 Siemens	5	100.0	0.0	0.0	3	0.0	e
2 Abbott	8	100.0	0.0	0.0	0	217.2	e
3 Roche	22	100.0	0.0	0.0	2	0.0	e
4 altri metodi	4	100.0	0.0	0.0	2	65.6	e

1 altri risultati sono stati presentati ma non pubblicati perché i gruppi di metodi erano troppo piccoli. (< risultati per gruppo)

